


# Tobii Dynavox I-Series

## Guida rapida

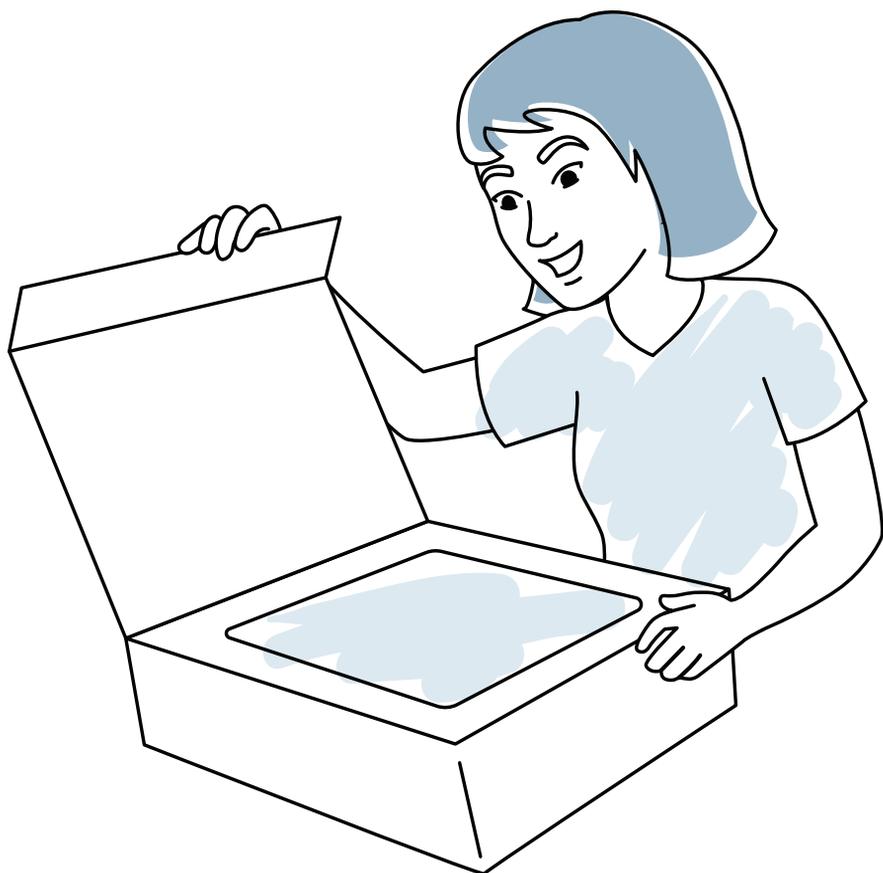


**tobii**dynavox

## Cosa include?




- 1 Dispositivo
- 2 Base regolabile
- 3 Cavo di alimentazione
- 4 Guida rapida
- 5 Schede di formazione
- 6 Libretto di sicurezza e conformità
- 7 Borsa documenti


## Acquisisci dimestichezza con il tuo dispositivo

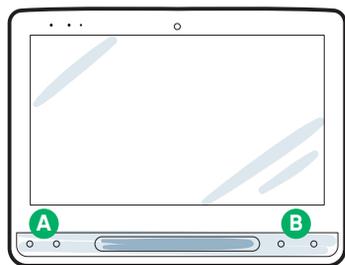

Lato anteriore

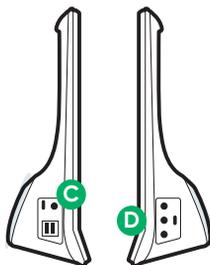

Lati

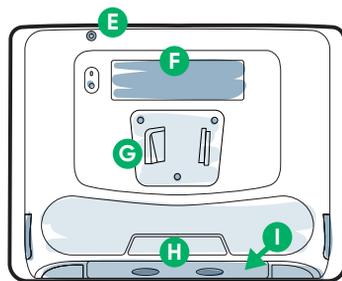

Indietro

- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| <b>A</b> Pulsanti adattivi           | <b>D</b> Jack di alimentazione CC/Porta di ricarica | <b>G</b> Piastra di supporto*                  |
| <b>B</b> Pulsanti Volume             | <b>E</b> Pulsante di alimentazione                  | <b>H</b> Ricevitore/Trasmittitore a infrarossi |
| <b>C</b> Connettore di alimentazione | <b>F</b> Finestra Partner                           | <b>I</b> Accesso alla batteria**               |

\*Se utilizzi un supporto Daessy, avrai bisogno di una piastra di adattamento.

\*\*La batteria è situata nella parte inferiore del dispositivo.

Segui i quattro passi in questa guida e il tuo nuovo dispositivo I-Series sarà configurato e pronto all'uso.

## Passo 1: Configurazione iniziale

### Avvia il dispositivo


- 1 Collega il cavo di alimentazione al dispositivo e inserisci la spina nella presa di alimentazione.
- 2 Premi il pulsante di accensione.



### Configurazione

Quando accendi il dispositivo, vedrai una tra queste due schermate. Se il dispositivo non è stato preconfigurato, ti verrà richiesto di completare prima il processo di installazione di Windows.

#### Installazione di Windows

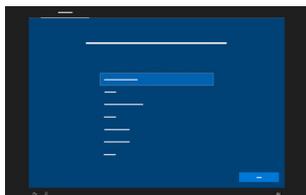

Sebbene questo processo non richieda un account Microsoft, consigliamo di collegarti o creare un account per l'utente e non come assistente.

#### Procedura guidata di avvio: Scegli la tua app



Scegli quale app avviare automaticamente quando il dispositivo è acceso.

## Passo 2: Configurazione del software di comunicazione

Segui i comandi nel software scelto per creare il un nuovo utente o ripristinare un file utente esistente.



### TD Snap

Utenti di comunicazione simbolica



### Communicator 5

Utenti di comunicazione testuale



**Non eseguire la calibrazione prima che il dispositivo Controllo oculare (Gaze Interaction) sia stato montato e la persona sia stata posizionata in modo confortevole. Segui la Fase 3 per i suggerimenti di montaggio e posizionamento.**

## Passo 3: Montaggio e posizione

Per un uso corretto, è necessario che il dispositivo e l'utente si trovino in una posizione ottimale. Posiziona il dispositivo su un sistema di montaggio o su un tavolo utilizzando la base regolabile.



### Suggerimenti per il montaggio e il posizionamento

- Assicurati che la persona sia posizionata in modo confortevole. Regola il supporto del dispositivo in modo che sia adatto alla persona.
- Avvia la finestra Stato del tracciamento per controllare la posizione degli occhi. Orienta il dispositivo in modo che la persona possa vedere in modo chiaro lo schermo e verificare che gli occhi siano dentro la finestra Stato del tracciamento.

#### Per avviare lo Stato del tracciamento sul dispositivo:

Tocca il pulsante adattivo  sulla parte anteriore del dispositivo.

- Avvicina o allontana il dispositivo dalla persona per posizionare il triangolo nell'area verde della finestra Stato del tracciamento.
- Se la testa della persona è inclinata verso sinistra o verso destra, è necessario inclinare di conseguenza il dispositivo.
- Se la persona è in posizione reclinata, è possibile montare il dispositivo sopra di lui/lei utilizzando un sistema di montaggio, come ad esempio un supporto da pavimento.
- Posiziona lo schermo in modo che l'utente guardi dritto e non in alto o in basso. La scelta di una posizione più alta è preferibile rispetto a quella più bassa.
- La calibrazione del tracciamento oculare calibra gli occhi dell'utente, non la sua posizione. Invece di rieseguire la calibrazione, riposiziona il dispositivo se la posizione dell'utente è cambiata.

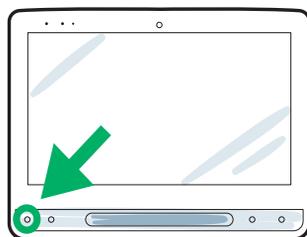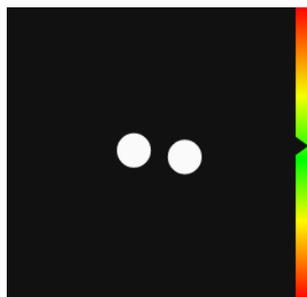

# Passo 4: Calibrazione

Non è necessaria una calibrazione perfetta per utilizzare in modo efficiente il tracciamento oculare. All'inizio, esegui la calibrazione una volta senza preoccuparti troppo del risultato, quindi consenti alla persona di prendere dimestichezza con il tracciamento oculare. Puoi sempre rivedere la calibrazione in un secondo momento.




**Non devi eseguire una calibrazione ogni volta che utilizzi il dispositivo.**

## Per calibrare TD Snap:

- 1 Seleziona il pulsante **Modifica**.




- 2 Seleziona **Utente**.

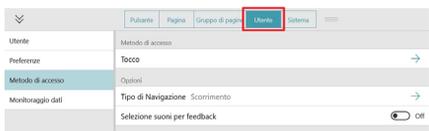


- 3 Seleziona **Metodo di Accesso**.

- 4 Seleziona **Controllo oculare**.

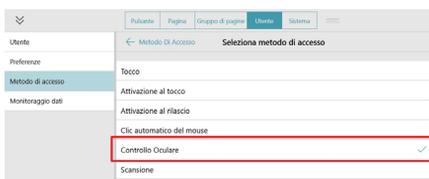

- 5 Scorri verso il basso e seleziona **Calibra**.

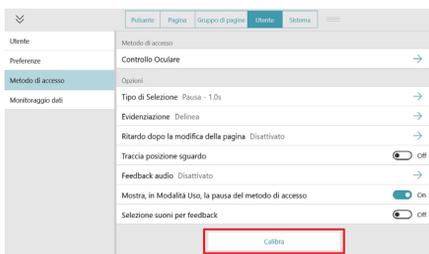

## Per calibrare Communicator 5:

- 1 Apri il **Menu rapido**.

Per aprire il Menu rapido, premi Ctrl + M sulla tastiera, fai clic con il pulsante destro del mouse oppure tieni premuto e rilascia un punto qualsiasi sullo schermo.



- 2 Seleziona **Impostazioni avanzate**.



- 3 Seleziona **Metodo di immissione** e verifica che sia selezionato **Gaze Interaction**.



- 4 Seleziona **Gaze Interaction Settings**.

Qui puoi modificare il tipo di attivazione e scegliere fra clic automatico o sensore, modificare il profilo di calibrazione e avviare una nuova calibrazione.



# Siamo qui per aiutare



## myTobiiDynavox

Usa il tuo account gratuito per sincronizzare, condividere Gruppi di pagine, memorizzare backup e altro ancora! Visita:  
[www.myTobiiDynavox.com](http://www.myTobiiDynavox.com)



## Hub di apprendimento

Hub di apprendimento Tobii Dynavox:  
[learn.tobiidynavox.com](http://learn.tobiidynavox.com)



## Materiale di formazione

Manuale Utente:  
<https://qrco.de/ISManual>

Schede di formazione Communicator 5:  
<https://qrco.de/C5Cards>

Schede di formazione TD Snap Core First:  
<https://qrco.de/TDSnapCards>

Schede di formazione TD Snap Text:  
<https://qrco.de/TextCards>

Schede di formazione TD Snap Aphasia:  
<https://qrco.de/AphasiaCards>

Guida all'implementazione della scansione TD Snap: <https://qrco.de/ScanGuide>



## Supporto aggiuntivo

Community:  
<https://qrco.de/TDFB>

Contattare il rappresentante Tobii Dynavox locale per supporto tecnico.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di configurazione:



[qrco.de/bbBdN3](https://qrco.de/bbBdN3)