


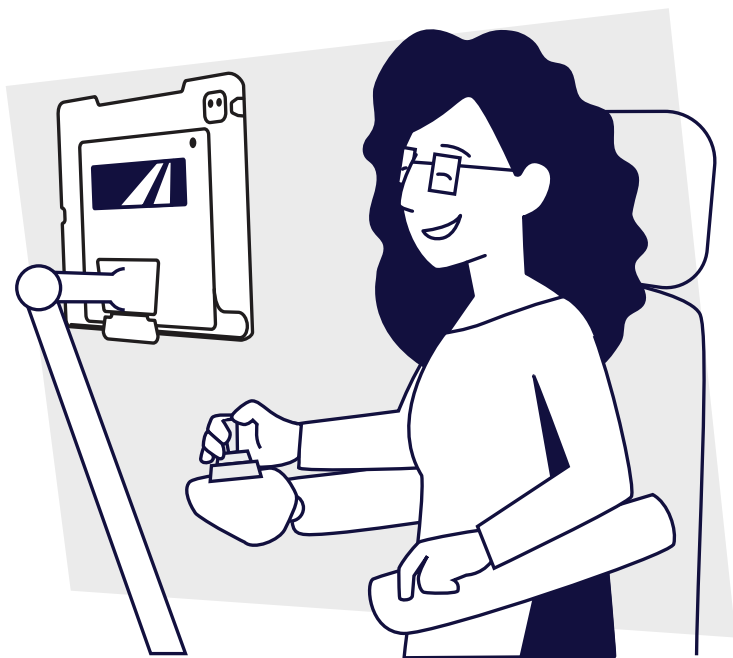


TD Pilot med TD Talk

Startguide

Börja här

Vad innehåller förpackningen

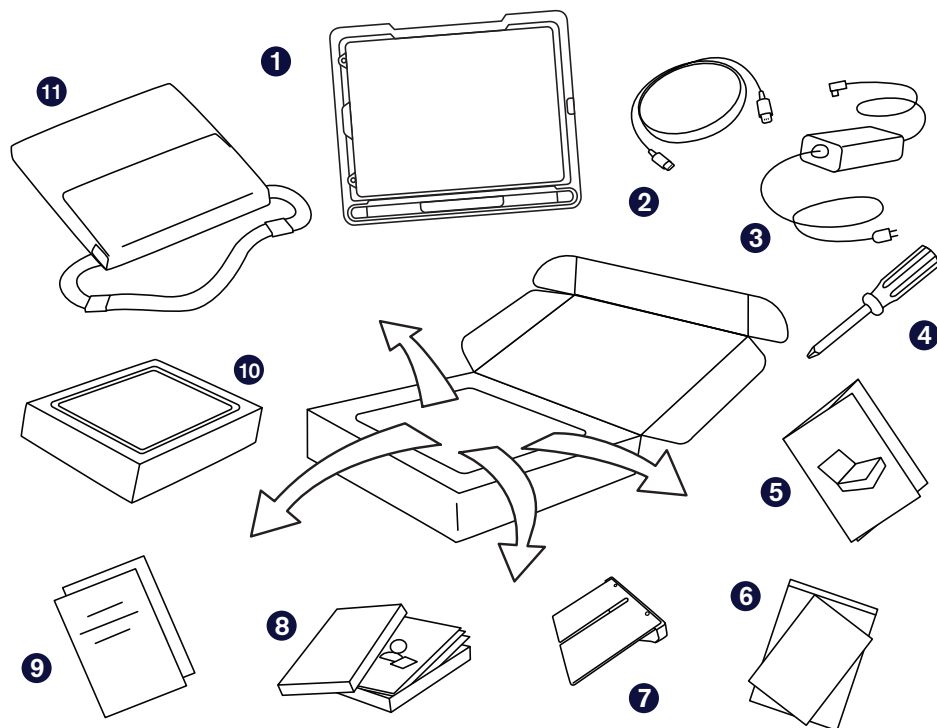

1 Förmonterad enhet

(iPad Pro 12.9, TD Pilot-bas, skyddande skal, ConnectIT-/Rehadapt-monteringsplatta, anslutningskabel USB-C till USB-C, förinstallerat batteri)

2 Anslutningskabel Lightning – USB C

3 Laddare med sladd

4 Skruvmejsel

5 Startguide

6 Dokument om säkerhet och överensstämmelse

7 Justerbart fäste

8 Utbildningskort för TD Talk och AssistiveTouch

9 Garantidokument

10 iPad-låda (innehållande iPad-laddare)

11 Bärväska

Kom igång

Denna startguide är utformad för två personer: den person som kommer att använda enheten för att kommunicera och en hjälpare som kan vidröra skärmen och flytta enheten. Avsnitten med en handsymbol måste utföras av hjälparen. Avsnitten med en ögonsymbol ska utföras av den person som kommer att använda enheten med ögonstyrning. När stegen i guiden är utförda kan personen använda ögonstyrning för att kommunicera i appen TD Talk.

Hjälpare




Användare



Strömknapp

- 1 Anslut laddningskabeln till laddningsporten på sidan av TD Pilot-basen och sätt sedan nätkontakten i ett vägguttag.
- 2 Tryck på strömknappen på baksidan av TD Pilot för att starta den.
- 3 Tryck på strömknappen på iPaden för att starta den.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera iPaden.

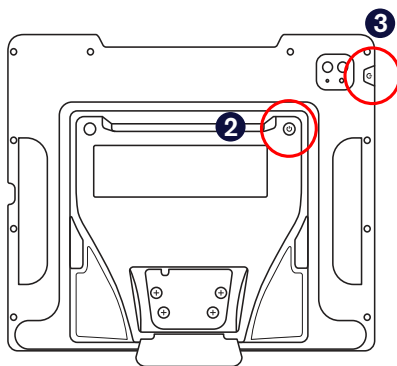

När konfigureringen av iPaden är klar visas hemskärmen med dina app-ikoner.

Konfigurera åtkomst med ögonstyrning

Konfigurera skärmen för ögonstyrningens noggrannhet



1 Tryck på **Inställningar**.



2 På vänster sida trycker du på kategorin **Hemskärm och docka**.

3 På höger sida väljer du **Använd stora appsymboler** för att göra symbolerna större.

4 På vänster sida trycker du på kategorin **Visning och ljusstyrka**.

5 På höger sida väljer du **Mörkt**.

6 På höger sida bläddrar du ner och trycker på **Textstorlek**.

7 Flytta reglaget för textstorlek hela vägen till höger.



Obs: Detta ökar textstorleken i alla kompatibla program.

8 Tryck på **Visning och ljusstyrka** på vänster sida för att återgå till inställningarna för visning och ljusstyrka.

9 På höger sida bläddrar du ner och trycker på **Visa**.



Obs: Denna inställning är inte tillgänglig på iPads som är mindre än 11 tum.

10 Välj **Zoomad** och tryck sedan på **Ställ in**.

11 I popup-fönstret trycker du på **Använd zoomad**. Skärmen kommer att återställas ett kort ögonblick.

12 Välj **Avbryt** för att stänga popup-fönstret Använd zoomad.

13 Nu måste iPaden startas om helt för att zoominställningarna ska tillämpas. Tryck på **Allmänt** till vänster och svep sedan neråt på höger sida och tryck på **Stäng av**. När iPaden har stängts av trycker du på strömknappen för att starta den igen.



Vad har AssistiveTouch att göra med ögonstyrning?

AssistiveTouch är utvecklad för personer som har svårt att peka på skärmen. Menyn AssistiveTouch låter dig använda pekfunktioner, som att trycka och skrolla, med ögonstyrning. Den tillhandahåller också genvägar som är tillgängliga via ögonstyrning såsom hemskärmen och appväxlare, vilka normalt nås genom gester.

Konfigurera AssistiveTouch



- 1 Tryck på **Inställningar**.



- 2 På vänster sida trycker du på **Tillgänglighet**.

- 3 På höger sida trycker du på **Pekstyrning**.

- 4 Tryck på **AssistiveTouch** och starta den.

- Nu är ögonstyrning aktiverad. Du kommer att se pekaren som visar var på skärmen din ögonstyrning finns. Menyknappen för AssistiveTouch visas också på skärmen.



Obs: Om du uppmanas att anpassa toppnivåmenyn trycker du på Avbryt.

- 5 Dra menyknappen för AssistiveTouch till skärmens högra övre tredjedel.

Anpassa menyn för AssistiveTouch



- 1 På höger sida väljer du **Anpassa toppnivåmeny**.

- 2 Tryck på **+** för att ändra antalet ikoner till 8.

- 3 Tryck på **Meddelandecenter**.

- 4 Sveg till listans slut och tryck på **Växla mellan Pausa/återuppta fokus**. Tryck utanför listan för att stänga den.

- 5 Tryck på knappen **Gester**.


- 6 Sveg upp och tryck sedan på **Flytta meny**. Tryck var som helst utanför menyn för att stänga den.

- 7 Fortsätt att redigera menyikonerna tills menyn matchar den till höger.

- 8 På vänster sida väljer du **Tillgänglighet**.

- 9 På höger sida väljer du **Pekstyrning**.

- 10 På höger sida väljer du **AssistiveTouch**.

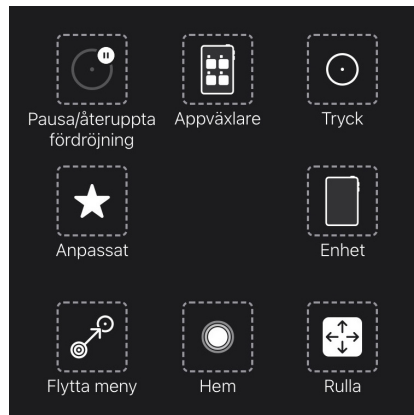

Konfigurera fokuskontroll



- 1 På höger sida sveper du ner till slutet av AssistiveTouch-menyn. Aktivera **Fokuskontroll**.



Obs: Om du uppmanas att anpassa toppnivåmenyn för AssistiveTouch trycker du på **Nej**.

- 2 Tryck på minustecknet (–) intill **Sekunder** för att ändra fokuseringstiden till 1,5 sekunder.



Tips: Denna inställning för fokuseringstid är för att komma igång. Du kan ändra fokuseringstiden senare så att den passar dina behov.


Väcka och låsa upp din iPad



iPaden vaknar automatiskt när ögonstyrningen upptäcker användarens ögon. Lås upp din iPad genom att välja knappen AssistiveTouch och sedan Hem.

Prova nu:

- 1 Tryck på den översta knappen för att låsa din iPad.
- 2 Titta på skärmen i några ögonblick. Din iPad vaknar och visar låsskärmen.
- 3 Tryck eller använd din blick för att välja knappen **AssistiveTouch-menyn** och välj sedan **Hem**.

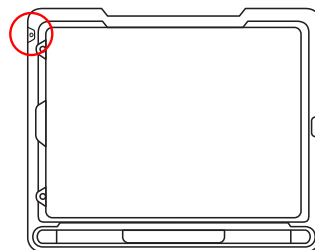

Nu är din iPad upplåst.



Tips: Om du vill ha extra säkerhet på din enhet rekommenderar vi att du använder Face ID. Med Face ID kan du låsa upp enheten utan att behöva ange en lösenkod varje gång. Konfigurera Face ID i *iPad OS Inställningar* > *Face ID och lösenkod*.

Konfigurera TD Talk

- 1 Tryck på appen **TD Talk**.



- 2 Svep upp från bokstaven T på TD Talk-tangentbordet för att öppna menyn utanför skärmen.

- 3 Tryck på knappen **Mer**.



- 4 Tryck på **Inställningar**.



- 5 Ställ in gränssnittsspråk för TD Talk:

- Tryck på **högerpilen** för att gå till **Allmänna** inställningar.
- Tryck på **Öppna** i Allmänna inställningar.
- Välj önskat språk.
- Tryck på **Tillbaka** för att återgå till Inställningar.



- 6 Välja röster:

- Tryck på **Öppna** på röstpanelen.
- Överst på skärmen väljer du det språk du vill tilldela en röst.
- Välj en röst.
- Tryck på **X** för att avsluta TD Talk-inställningar.



Obs: Röster överst i listan är nedladdade och klara att använda. Röster längst ner i listan är tillgängliga att ladda ned.

Valfritt: Lägg till ytterligare tangentbordsspråk.


- 1 Gå till **Menyn utanför Skärmen > Mer > Inställningar > Tangentbord > Lägg till/ändra**.
- 2 Välj ett språk från fliken **Installerade** eller gå till fliken **Ladda ned** för att hitta andra språk.
- 3 Tryck på **Tillbaka** för att återgå till TD Talk-inställningar.
- 4 Öppna **Röstinställningar**, välj det nya språket och välj sedan en röst för det språket.




Tips: När du använder TD Talk kan du snabbt byta språk genom att välja jordgloben i tangentbordets nedre vänstra hörn.

Montera och positionera


Förbered användaren för att använda ögonstyrning genom att se till att personen är bekvämt placerad. Om personen använder glasögon ska hen ha dem på sig och linserna ska vara rena.

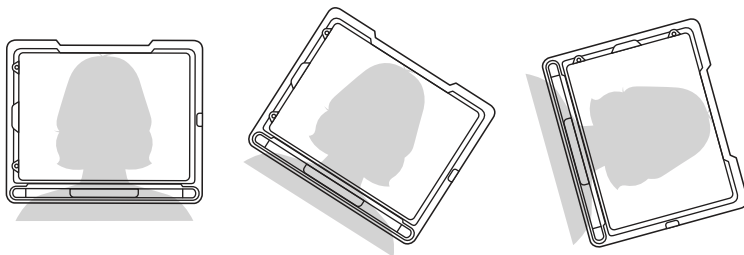

Placera TD-pilot på monteringsystemet eller en plan yta i, eller strax nedanför, ögonhöjd. Om användarens huvud lutar åt vänster eller höger ska TD Pilot lutas lika mycket. Det är viktigt att skärmens vinkel överensstämmer med vinkeln på användarens ansikte. De flesta användare som sitter vid ett skrivbord eller bord behöver ha TD Pilot placerad högre än bordsytan.

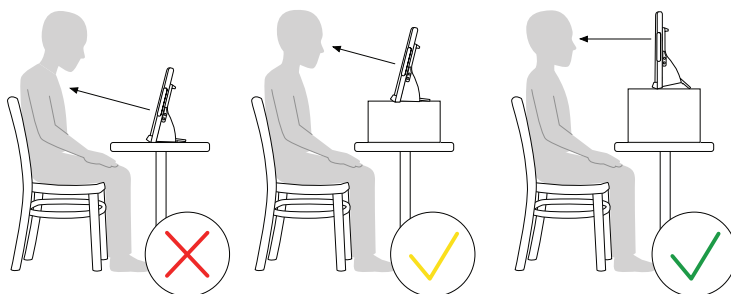

Enhetens placering kan behöva finjusteras under kalibreringsstegen på nästa sida. Justera alltid enheten så att det passar användaren, inte tvärtom.

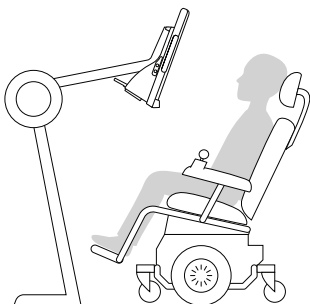

Obs: Ett monteringsystem är det bästa alternativet för en bra placering som är enkel att justera under dagen. Det finns flera tillgängliga monteringsalternativ, inklusive golvstativ, bordsstativ och rullstolsfäste. Besök [TobiiDynavox.com](https://www.tobii-dynavox.com) eller kontakta din lokala Tobii Dynavox-partner.


Kalibrera



- 1 Tryck på appen **CoPilot**.



- 2 Följ anvisningarna på skärmen i CoPilot för att kalibrera ögonstyrningen efter användarens ögon.

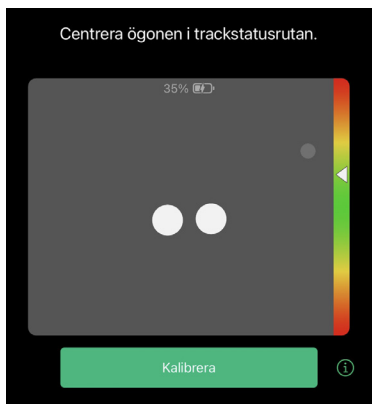

- 3 När kalibreringen är klar sveper du uppåt från nedre delen av skärmen för att återgå till hemskärmen.



Resterande steg ska utföras av användaren av TD Pilot-enheten med ögonstyrning. Som hjälpare läser du instruktionerna högt. Läs i en hastighet som ger enhetsanvändaren tillräcklig tid att göra sina val med blicken.

Prova den

Din TD pilot är nu klar att användas! Använd dina ögon för att utföra instruktionerna nedan.

Öppna TD Talk

Använd din blick för att öppna appen **TD Talk**.



Obs: Om du har svårt att välja på skärmen vid den här tidpunkten kan din hjälpare trycka på skärmen åt dig tills du kommer in i TD Talk. Ögonstyrning är en inlärd förmåga, så öva i TD Talk för att bekanta dig med den.

Skriva och läsa upp

Använd ögonstyrning för att säga några ord och fraser i TD Talk.

- Presentera dig.
- Kommentera vädret.
- Använd siffertangentbordet för att säga din ålder och ditt telefonnummer.

Fortsätt till TD Talks utbildningskort

Fortsätt konfigurationen med hjälp av TD Talks utbildningskort som följde med i lådan till din TD Pilot.

Instruktionerna och felsökningsförslagen på TD Talks utbildningskort kan hjälpa dig att förbättra din ögonstyrning och använda TD Talk för att kommunicera snabbare och effektivare. Du kommer också att lära dig mer om att använda TD Talk för att komma åt andra appar på din iPad med ögonstyrning.

Ytterligare resurser

Skanna QR-koden eller använd länkarna.



Tobii Dynavox

se.tobiidynavox.com



Apple

[grco.de/
AppleAccessibilitySV](https://grco.de/appleaccessibilitysv)



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



**Tobii Dynavox
Learning Hub
(endast på engelska)**

learn.tobiidynavox.com



TD Community

grco.de/TDFB



Supportsida för TD Pilot

grco.de/PilotHelpSV



**Användarmanual
för TD Pilot**

grco.de/PilotDocs



Dokumentation

*TD CoPilot >
Inställningar > Hjälp*



**Teknisk support i
Sverige**

08 522 950 20
(välj 1 för support)