


¿Qué hay en la caja?



- 1 Dispositivo
- 2 Base ajustable
- 3 Cable de alimentación
- 4 Guía de inicio
- 5 Tarjetas de entrenamiento
- 6 Folleto de seguridad y cumplimiento
- 7 Bolsa de documentos

Conozca su dispositivo

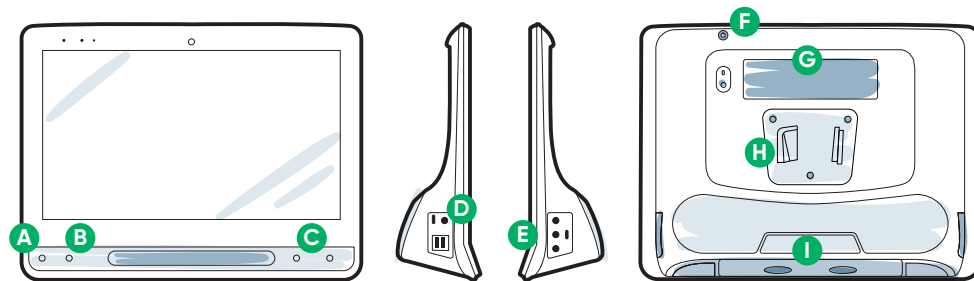

Parte frontal

Laterales

Parte trasera

- | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A Botón del estado de seguimiento | D Conector de alimentación | G Ventana del interlocutor |
| B Botón de calibración | E Puertos de conmutación | H Placa de montaje* |
| C Botones de volumen | F Botón de encendido | I Transmisor IR |

*Si usa un soporte Daessy, necesitará una placa de conversión.

Estamos aquí para ayudar



myTobiiDynavox

¡Use su cuenta gratuita para sincronizar, compartir Conjuntos de páginas, almacenar copias de seguridad ¡y más!
Visite: www.myTobiiDynavox.com



Otros

Manual del usuario: bit.ly/iseriees



Soporte adicional

Comunidad: bit.ly/FBComES


Soporte técnico:
Norteamérica: 1-800-344-1778 ext. 1
Resto del mundo: +46 8 522 950 20 ext. 1

#PowerToBeYou

Comparta fotos y videos del desempaquetado y de su primera experiencia con I-Series usando [#iopenedthebox](https://twitter.com/iopenedthebox).

Tobii Dynavox I-Series

Guía de inicio

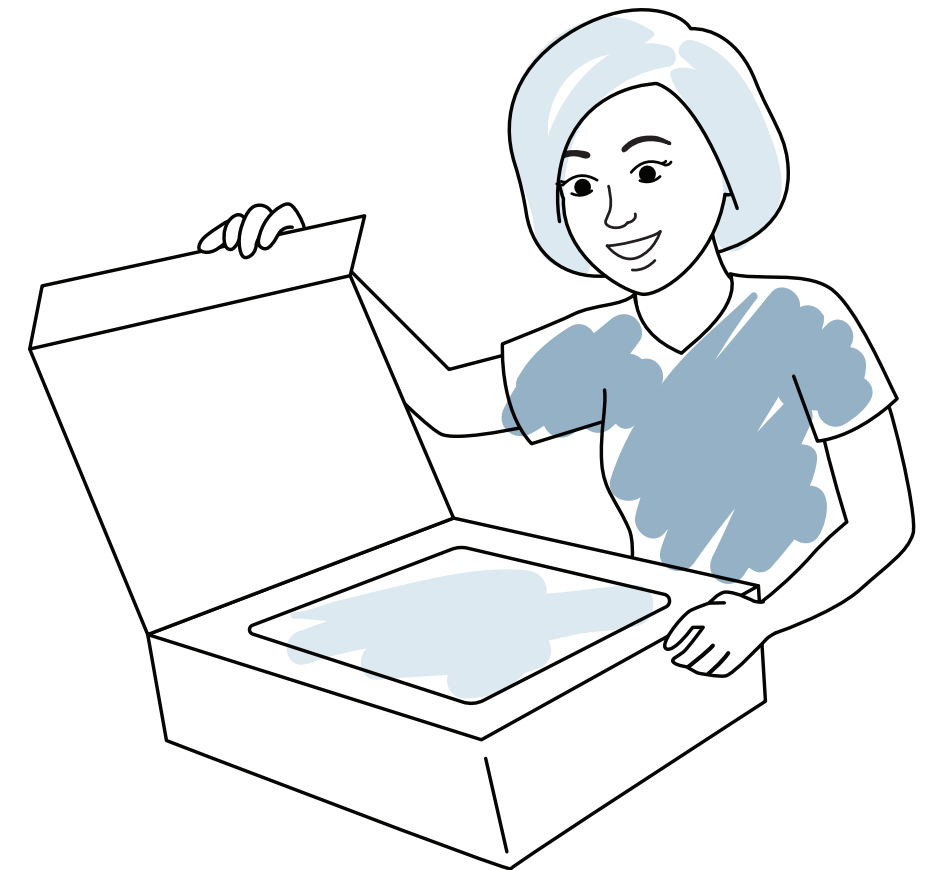

#12007974 Guía de inicio de Tobii Dynavox I-Series v1.0 - es-NX


tobii dynavox

Siga los tres pasos de esta guía y su nuevo dispositivo I-Series estará configurado y listo para usar.

Paso 1: configuración inicial

Iniciar el dispositivo


- 1 Conecte el cable de alimentación al dispositivo y enchúfelo a una toma de corriente.
- 2 Presione el botón de Encendido.

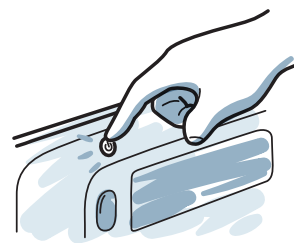

Configuración


Cuando encienda su dispositivo, verá una de dos pantallas. Si su dispositivo no ha sido preconfigurado, se le pedirá que complete primero el proceso de configuración de Windows.

Configuración de Windows

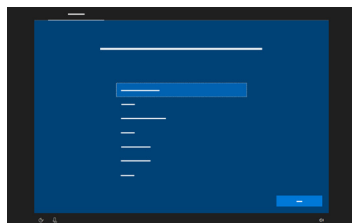

Si bien este proceso no requiere una cuenta de Microsoft, le recomendamos que se conecte a una cuenta de usuario (y no a una cuenta de cuidador) o que cree una.

Asistente de configuración: elija su aplicación

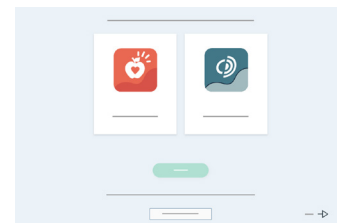

Elija qué aplicación se iniciará automáticamente cuando encienda el dispositivo.

Paso 2: montaje y posición



Para un uso exitoso, se necesita posicionamiento optimizado, tanto para el dispositivo como para el usuario. Coloque el dispositivo en el sistema de montaje o en una mesa con la base ajustable, frente al usuario. Si utiliza Gaze Interaction, revise los Consejos para el seguimiento visual.


Paso 3: configuración del software de comunicación



Snap Core First
Comunicadores compatibles con símbolos

Asistente de configuración de Snap

Siga las instrucciones para crear su nuevo usuario o restaurar un archivo de usuario guardado.

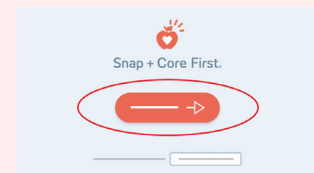

Tamaño de la cuadrícula

Elija un tamaño de cuadrícula que proporcione la mayor cantidad de botones para el vocabulario y a los que el usuario pueda acceder con precisión. Puede cambiarlo fácilmente más tarde.

Método de acceso

Escoja su método de acceso:

- 1 Seleccione **Editar**.
- 2 Seleccione **Usuario**.
- 3 Seleccione **Método de acceso**.
 - Si utiliza la mirada, seleccione **Gaze Interaction**.
 - Seleccione el botón **Método de acceso**.
 - Desplácese hacia abajo para seleccionar **Calibrar** y siga las instrucciones.



Pasos siguientes

Pathways para Core First, un recurso GRATUITO, ayuda a enseñar habilidades de comunicación, con videos instructivos, cuadrícula de objetivos, planes de lecciones y más. <http://bit.ly/TDPCF>



Las tarjetas de entrenamiento Snap Core First lo ayudarán a comenzar. Contienen ideas para el uso diario e instrucciones paso a paso para la edición básica.




Communicator 5
Comunicadores compatibles con texto

Asistente de configuración de Communicator 5

Siga las instrucciones para crear su nuevo usuario.

- Si utiliza Gaze Interaction, seleccione Calibrar y siga las instrucciones.
- Si no utiliza Gaze Interaction, cambie el Método de entrada.

Seleccione su Página de inicio

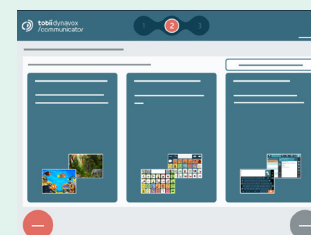

Emergente

Lo mejor para un comunicador principiante con habilidades lingüísticas tempranas.

Símbolo

Estas páginas permiten que los comunicadores creen sus propios mensajes, símbolo por símbolo.

Texto

Destinado a personas que compondrán mensajes principalmente con un teclado.

Pasos siguientes

Las tarjetas de entrenamiento Communicator 5 lo ayudarán a comenzar. Contienen ideas para el uso diario e instrucciones paso a paso para la edición básica.



Consejos para el seguimiento visual

- Si la calibración parece desactivada, puede tocar el botón del Estado de seguimiento (triángulo) en la parte frontal del dispositivo para abrir el Cuadro del estado de seguimiento en cualquier momento. Esto determinará si los ojos del usuario están en una buena posición para Gaze Interaction.
- Después de calibrar, verá marcadores de colores que muestran cuán bien calibró en esa área de la pantalla. El verde y el amarillo le darán más precisión, pero el rojo aún está bien para comenzar. Puede mejorar esto con el tiempo.
- Puede personalizar el proceso de calibración para satisfacer las necesidades específicas del usuario (p. ej., número de objetivos, tipo de estímulo).

