


# Guide de mise en route

## SC Tablet Mini



## Que contient la boîte ?

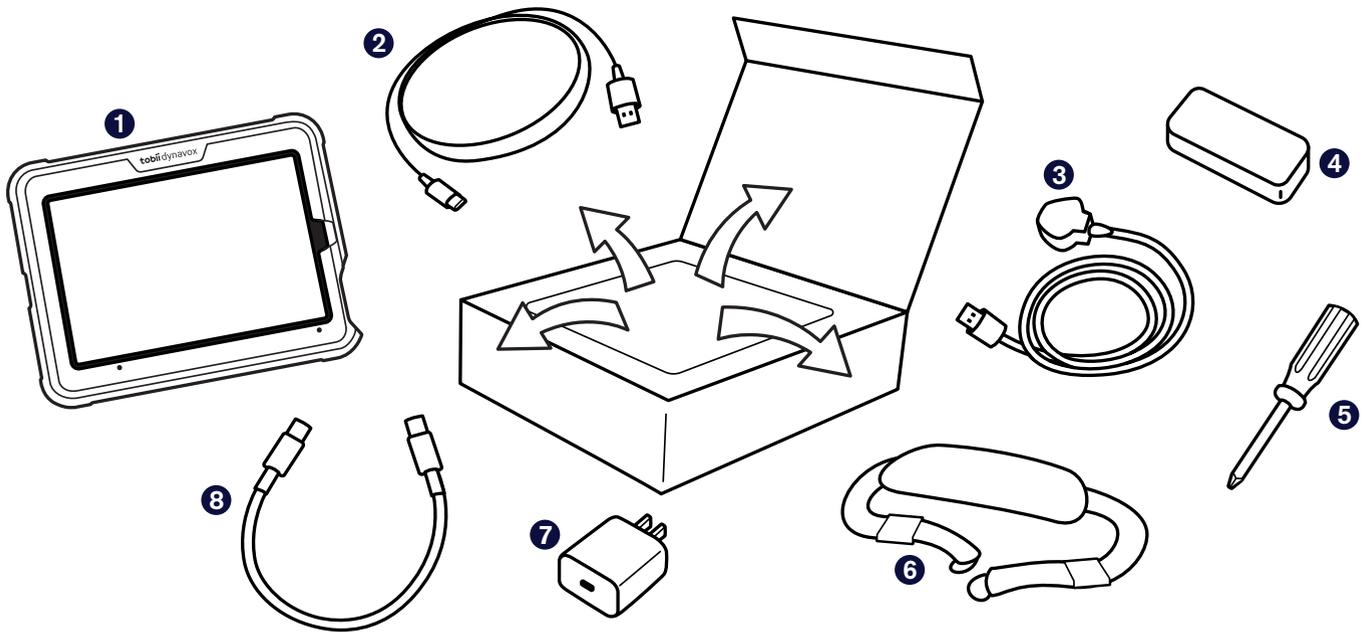

**1** SC Tablet montée

(TD Speech Case Mini et iPad Mini)

**2** Câble USB-C vers USB-A

**3** Câble d'alimentation Speech Case Mini Power

**4** Source d'alimentation de la Speech Case (USB à deux ports)

**5** Tournevis

**6** Bandoulière


**7** Chargeur USB-C iPad

**8** Câble d'alimentation USB-C iPad




*Si vous avez acheté des accessoires, consultez les instructions d'installation séparées.*


## Découvrez votre dispositif

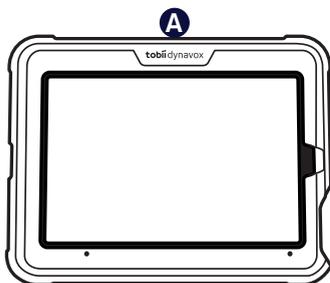


Avant

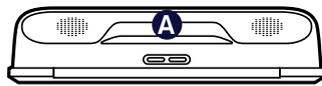

Haut

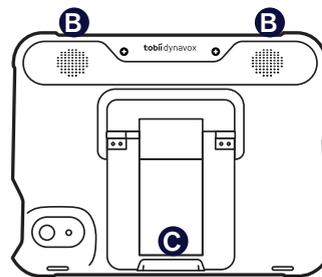

Retour

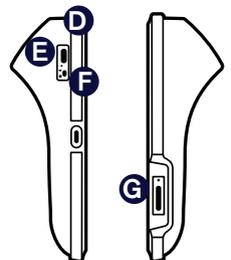

Côtés

**A** Bouton de réglage du volume

**B** Enceinte

**C** Béquille pliable

**D** Port d'alimentation

**E** Témoin lumineux de chargement


(témoin d'alimentation DEL)

**F** Outil de sélection Marche/Arrêt


**G** Bouton Marche/Arrêt de l'iPad Mini

## Étape 1 : Marche/arrêt

- ❶ Branchez le câble d'alimentation sur la Speech Case, puis sur une prise de courant.
- ❷ Faites basculer l'interrupteur d'alimentation de la Speech Case Mini sur la position ON (allumé).
- ❸ Connectez le câble d'alimentation USB-C de l'iPad à l'iPad et à l'adaptateur secteur, puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise.
- ❹ Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur l'iPad afin de l'allumer.

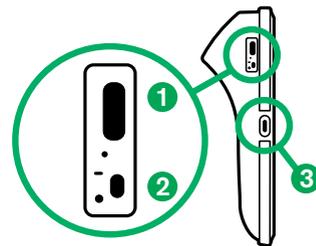

**i** Si vous utilisez plusieurs tablettes Speech Case au sein d'un seul emplacement, vous pouvez identifier chacune d'entre elles grâce aux cinq chiffres de l'identifiant Bluetooth. Cet identifiant correspond à la combinaison unique de cinq chiffres située sous le support pliable de la Speech Case.

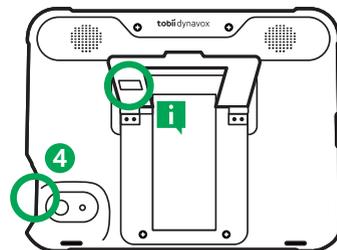

## Étape 2 : Couplage Bluetooth

- ❶ Sur l'iPad, allez à **Paramètres > Bluetooth**.
- ❷ Assurez-vous que Bluetooth est **ACTIVÉ**.
- ❸ Sélectionnez SCmini.

## Étape 3 : Sélection d'une application de communication

Utilisez le tableau ci-dessous pour identifier l'application de communication qui convient le mieux à l'utilisateur.

TD Snap et TD Talk sont préinstallés sur votre SC Tablet Mini, il vous suffit donc d'appuyer sur l'icône de votre application préférée pour commencer à communiquer !

	 <b>TD Snap</b>	 <b>TD Talk</b>
<b>Description</b>	TD Snap est une application de synthèse vocale qui s'adresse aux personnes qui ne savent pas lire et/ou qui nécessitent une prise en charge des symboles (notamment les personnes atteintes d'aphasie).	TD Talk est une application de synthèse vocale qui s'adressent aux personnes alphabétisées et qui n'ont pas besoin de symboles à l'appui.
<b>Composer des messages</b>	Les messages sont composés à l'aide de boutons mots et phrases accompagnés de symboles. Les messages sont composés à l'aide d'un clavier à l'écran avec prédiction de mots et de phrases, similaire à l'envoi de SMS.	Les messages sont composés à l'aide d'un clavier à l'écran avec prédiction de mots et expressions, similaire à l'envoi de SMS.
<b>Niveau d'alphabétisation</b>	Tous - d'émergent a avancé	Avancé
<b>Âges</b>	Tous âges	De l'adolescence à l'âge adulte
<b>Nouvelles aides</b>	Oui	Non

## Étape 4 : Apprentissage, pratique et dépannage

Votre dispositif SC Tablet Mini est maintenant prêt à être utilisé ! N'hésitez pas à explorer votre appareil et vos applications dès maintenant. Lorsque vous serez prêt à en savoir plus, consultez les fiches de familiarisation de TD Snap et de TD Talk. Les fiches de familiarisation vous apprennent à utiliser les principales fonctionnalités de votre logiciel de communication, à développer vos compétences en communication CAA et à résoudre les problèmes.



**Fiches de familiarisation  
TD Snap Core First**

[qrco.de/SnapCards](https://qrco.de/SnapCards)



**Fiches de familiarisation  
TD Talk**

[qrco.de/tlktrng](https://qrco.de/tlktrng)

## Ressources supplémentaires

Scannez les codes QR ou utilisez les liens.



**Manuel de l'utilisateur de la  
SC Tablet Mini**

[qrco.de/bd7f71](https://qrco.de/bd7f71)



**Centre d'apprentissage  
Tobii Dynavox**

[learn.tobiidynavox.com](https://learn.tobiidynavox.com)



**Page d'assistance de la  
TD Speech Case**

[qrco.de/bd7f6P](https://qrco.de/bd7f6P)



**myTobiiDynavox**

[mytobiidynavox.com](https://mytobiidynavox.com)



**Communauté TD**

[qrco.de/tdfbfr](https://qrco.de/tdfbfr)



**Pour toute demande  
d'assistance, veuillez contacter  
votre revendeur.**