


Snabbstartsguide

SC Tablet Mini



Vad innehåller förpackningen?

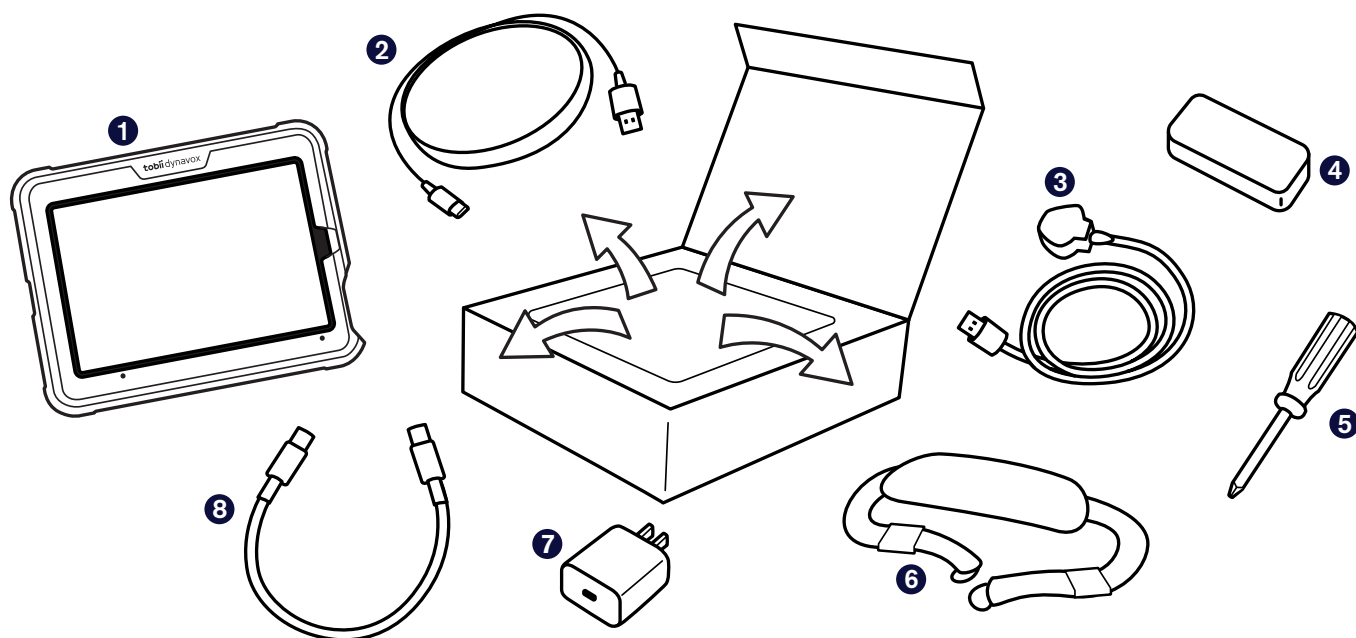

1 Monterad SC-platta
(TD Speech Case Mini och iPad Mini)

2 USB-C till USB-A-kabel

3 Strömkabel till Speech Case Mini

4 Strömförsörjning (dubbel USB)

5 Skruvmejsel

6 Axelrem


7 USB-C-strömadapter till iPad

8 USB-C-strömkabel till iPad



Om du har köpt några tillbehör, se de separata installationsinstruktionerna för dessa.

Lär känna din enhet

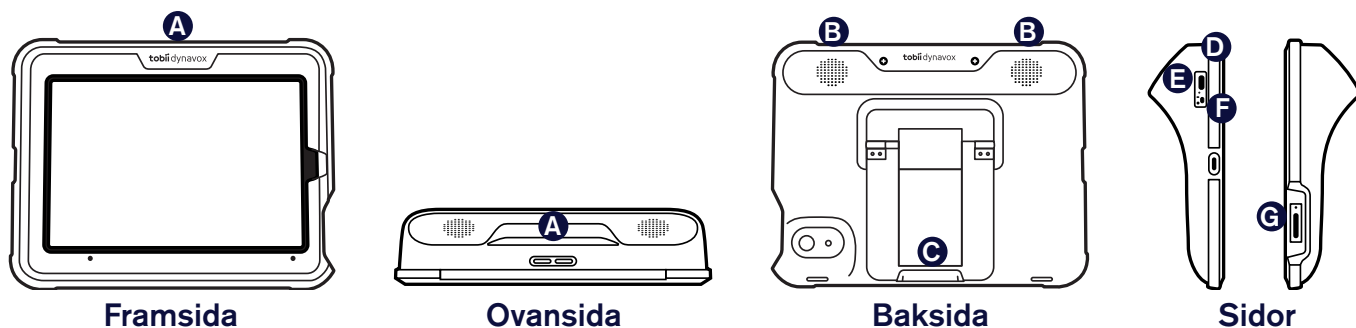

A Volymreglage

B Högtalare

C Utfällbart stöd

D Laddningsport

E Laddningsindikatorlampa
(LED-strömindikator)



F På/av-reglage

G iPad Mini-strömknapp

Steg 1: Strömknapp

- 1 Anslut strömkabeln till Speech Case Mini och kontakten till ett uttag.
- 2 Sätt strömreglaget på Speech Case Mini till PÅ (ON).
- 3 Anslut USB-C-strömkabeln till iPad och strömadapter och sätt sedan kontakten i ett vägguttag.
- 4 Tryck på strömknappen på iPaden för att starta den.

i Om flera Speech Cases används i samma rum kan varje Speech Case identifieras med de fem sista siffrorna i dess Bluetooth-ID. Det matchar det unika femsiffriga serienummer som finns under det inbyggda stödet på ditt Speech Case.

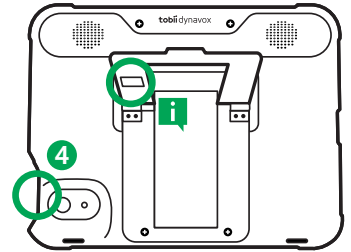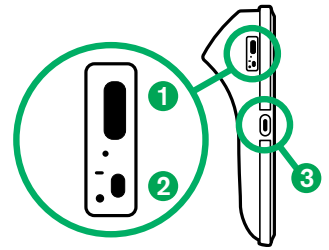

Steg 2: Bluetooth-koppling

- 1 Gå till **Inställningar > Bluetooth** på din iPad.
- 2 Se till att Bluetooth är PÅ.
- 3 Välj SCmini.

Steg 3: Välj en kommunikationsapp

Använd tabellen nedan för att identifiera vilken kommunikationsapp som passar användaren bäst.

Både TD Snap och TD Talk är förinstallerade på din SC Tablet Mini, så tryck bara på önskad appikon för att börja kommunicera.

	 TD Snap	 TD Talk
Beskrivning	TD Snap är en talgenererande app för användare som inte är läs- och skrivkunniga och behöver symbolstöd (inklusive personer med afasi).	TD Talk är en talgenererande app för användare som är läs- och skrivkunniga och inte behöver stödsymboler.
Skapa meddelanden	Meddelanden skapas med hjälp av ord- och frasknappar med stödsymboler. Ett tangentbord på skärmen är också tillgängligt.	Meddelanden skapas med ett tangentbord med ord- och frasprediktion som påminner om när man skriver sms.
Läskunnighetsnivå	Alla – nybörjare till avancerad	Avancerad
Åldrar	Alla åldrar	Tonåring till vuxen
Afasistöd	Ja	Nej

Steg 4: Lär dig, öva och felsök

Din SC Tablet Mini är nu klar att användas! Börja med att utforska din enhet och dina appar. När du är redo att lära dig mer kan du kolla in utbildningskortet för TD Snap och TD Talk. Utbildningskortet lär dig hur du använder de viktigaste i ditt kommunikationsprogram, förbättrar din kommunikation och hur du felsöker eventuella problem.



TD Snap Core First utbildningskort

grco.de/SnapCards



TD Talk utbildningskort

grco.de/tlktmg

Ytterligare resurser

Skanna QR-koden eller använd länkarna.



SC Tablet Mini Användarmanual

grco.de/bd7fC7



Tobii Dynavox Learning Hub

learn.tobiidynavox.com



TD Speech Case Supportsida

grco.de/bd7fBK



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



TD Facebook-community

grco.de/TDFB



Teknisk support i Sverige

08 522 950 20 (välj 1 för support)