


Tobii Dynavox T10 Kurzanleitung

Willkommen! Dies ist die Kurzanleitung für der Tobii Dynavox T10. Dieses Dokument gibt Ihnen eine Einführung in Ihre neue Kommunikationslösung: Es zeigt Ihnen, wo Sie Informationen finden und was Sie erwartet, wenn Sie Ihr T10 zum ersten Mal einschalten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem T10 und gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung für eine unterstützte Kommunikation ohne Kompromisse!

Überblick über die Hardware

1. **Ladestandsanzeige:** Leuchtet bernsteinfarben, während der Akku lädt. Leuchtet blau, wenn der Akku vollständig geladen ist.
2. **Betriebsschalter:** Zum Einschalten des Gerätes drücken und halten, bis das Tobii Dynavox Logo erscheint. Drücken und loslassen, um Gerät in den Energiesparmodus zu versetzen. Zum Ausschalten des Gerätes drücken und halten, bis Menü zum Herunterfahren erscheint.
3. **Kamera (Vorderseite):** Macht Bilder von Objekten, die sich vor dem Bildschirm befinden (z. B. Selbstporträts).
4. **Umgebungslichtsensor:** Passt die Bildschirmhelligkeit auf Grundlage des Umgebungslichts an.
5. **Lautsprecher:** Zwei Lautsprecher bieten ein umfangreiches Klangerlebnis.
6. **Wippschalter zur Lautstärkeregelung:** Drücken Sie auf die Schalterseite mit +, um lauter zu stellen. Drücken Sie auf die Schalterseite mit -, um leiser zu stellen.
7. **Buchse für Lautsprecher/Kopfhörer/externes Mikrofon:** Externe Lautsprecher, Kopfhörer oder ein externes Mikrofon verbinden.
8. **Kamera (Rückseite):** Zum Aufnehmen eigener Fotos.
9. **Öse für Trageband:** Zur Befestigung des Gurts.
10. **Ladeanschluss:** Schließen Sie den Adapter/das Ladegerät an, um den Akku zu laden.
11. **Micro-USB-Anschluss:** Anschließen eines Adapterkabels von Micro-USB auf USB-A.
12. **30-Pin-Dock-Anschluss:** Damit erhält das T10 IR- und kabelgebundene Netzwerkfunktionalität.
13. **Micro-HDMI-Anschluss:** Schließen Sie einen externen Monitor an Ihr Gerät an.
14. **Eingebautes Mikrofon:** Für Sprachaufnahmen und eigene Töne.

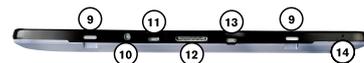

Support für Ihr Tobii Dynavox-Gerät

Onlinehilfe
Bitte sehen Sie zuerst online auf der entsprechenden Support-Seite für Ihr Tobii Dynavox-Gerät nach. Dort finden Sie aktuelle Informationen zu Fragen sowie Tipps und Tricks rund um Ihr Produkt. Sie finden unsere Support-Seiten online auf: www.TobiiDynavox.com oder www.myTobiiDynavox.com.

Kontakt zu Tobii Dynavox Fachhändler

Bei Fragen zu und Problemen mit Ihrem Produkt nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Fachhändler oder Wiederverkäufer von Tobii Dynavox auf, um Unterstützung zu erhalten. Dieser kennt sich mit Ihren persönlichen Gerätekonfigurationen aus und kann Ihnen am besten mit Tipps und Schulungen zu Ihrem Produkt behilflich sein. Die Kontaktdaten finden Sie auf www.TobiiDynavox.com/contact.

Laden des Akkus

Stecken Sie den Netzstecker des mit dem T10 mitgelieferten Ladegeräts in eine Wandsteckdose. Schließen Sie das Ladegerät an den dafür vorgesehenen Eingang (10) am Gerät an. Die Ladestandsanzeige (1) leuchtet während des Ladevorgangs be-
nsteinfarben und wechselt zu blau, sobald das Gerät vollständig geladen ist.

Trennen Sie die Verbindung zum Ladegerät, nachdem das Gerät vollständig geladen ist. Die Anzeigeleuchte wird dann automa-
tisch ausgeschaltet.


Inbetriebnahme

Sie kennen sich mit der Technologie noch nicht gut aus und wissen nicht genau, wie Sie anfangen sollen? Wir haben dem Rätselraten ein Ende gesetzt. Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, finden Sie das Compass-Symbol auf dem Desktop. Wählen Sie es aus. Alles Weitere übernehmen wir für Sie.



Überblick über den Benutzer-Assistenten

Mit dem **Benutzer-Assistenten** können Sie an Ihrem Gerät schnell ein paar Anpassungen vornehmen. Klicken Sie ganz einfach auf **Benutzer-Assistenten starten** und wählen Sie **Zu neues Seiten-Set** (für neue Benutzer) oder **Seiten-Set auswählen** (für erfahrenere Benutzer) aus. Sie können auch Ihre eigene Sicherungsdatei von Compass verwenden. Stellen Sie diese entweder von myTobiiDynavox oder von Ihrem eigenen Computer wieder her.

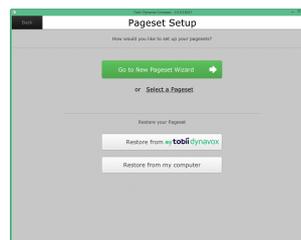

Ressourcen

Sobald der Benutzer-Assistent abgeschlossen ist, kann es losgehen. Sie haben noch Fragen? In unserem Ressourcenbereich finden Sie die Antworten.

myTobiiDynavox

Melden Sie sich auf myTobiiDynavox an. Hier haben Sie Zugang zu Unterstützung und zu Werkzeugen für die Einrichtung, erhalten technischen Support und können Kommunikationsseiten hoch-, herunterzuladen und teilen! Besuchen Sie www.myTobiiDynavox.com, klicken Sie auf **Anmelden** und registrieren Sie Ihr neues Device!

Wissensdatenbank und Hilfe

Die Wissensdatenbank oder Hilfevideos stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Klicken Sie einfach auf **Einstellungen** und wählen Sie dann **Hilfe** im Setup-Menü.

Technischer Support: Diesen finden Sie unter **www.mytobiidynavox.com > Community & Support > mytobiidynavox Community**.

Besuchen Sie die Online-Bibliothek, um Artikel der Wissensdatenbank zu lesen, Produkttipps zu recherchieren und angepasste Suchen durchzuführen, oder um sich im **Frage-Antwort-Bereich der Community** umzusehen. Falls Ihr Device Probleme bereitet, können Sie hier auch eine Reparatur veranlassen, indem Sie einen neuen Reparaturfall erstellen.

Wenn Sie den Support kontaktieren, halten Sie bitte Ihre Seriennummer für das Device bereit. Diese finden Sie an der Unter-
kante Ihres Device sowie unter **Einstellungen > Hilfe > Über**. Meine Seriennummer für das Device: _____.

Support für Ihr Tobii Dynavox-Gerät

Onlinehilfe
Bitte sehen Sie zuerst online auf der entsprechenden Support-Seite für Ihr Tobii Dynavox-Gerät nach. Dort finden Sie aktuelle Informationen zu Fragen sowie Tipps und Tricks rund um Ihr Produkt. Sie finden unsere Support-Seiten online auf: www.TobiiDynavox.com oder www.myTobiiDynavox.com.

Kontakt zu Tobii Dynavox Fachhändler
Bei Fragen zu und Problemen mit Ihrem Produkt nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Fachhändler oder Wiederverkäufer von Tobii Dynavox auf, um Unterstützung zu erhalten. Dieser kennt sich mit Ihren persönlichen Gerätekonfigurationen aus und kann Ihnen am besten mit Tipps und Schulungen zu Ihrem Produkt behilflich sein. Die Kontaktdaten finden Sie auf www.TobiiDynavox.com/contact.



Andere wichtige Informationen über das Device, auch über dessen Verwendungszweck sowie Copyright-Hinweise, erhalten Sie im T-Series Benutzerhandbuch. Weitere Informationen erhalten Sie unter **Einstellungen > Hilfe**.

Support für Ihr Tobii Dynavox-Gerät

Onlinehilfe
Bitte sehen Sie zuerst online auf der entsprechenden Support-Seite für Ihr Tobii Dynavox-Gerät nach. Dort finden Sie aktuelle Informationen zu Fragen sowie Tipps und Tricks rund um Ihr Produkt. Sie finden unsere Support-Seiten online auf: www.TobiiDynavox.com oder www.myTobiiDynavox.com.

Kontakt zu Tobii Dynavox Fachhändler
Bei Fragen zu und Problemen mit Ihrem Produkt nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Fachhändler oder Wiederverkäufer von Tobii Dynavox auf, um Unterstützung zu erhalten. Dieser kennt sich mit Ihren persönlichen Gerätekonfigurationen aus und kann Ihnen am besten mit Tipps und Schulungen zu Ihrem Produkt behilflich sein. Die Kontaktdaten finden Sie auf www.TobiiDynavox.com/contact.