


# TD Pilot con TD Snap

Guía de inicio

Comenzar  
aquí

# ¿Qué hay en la caja?

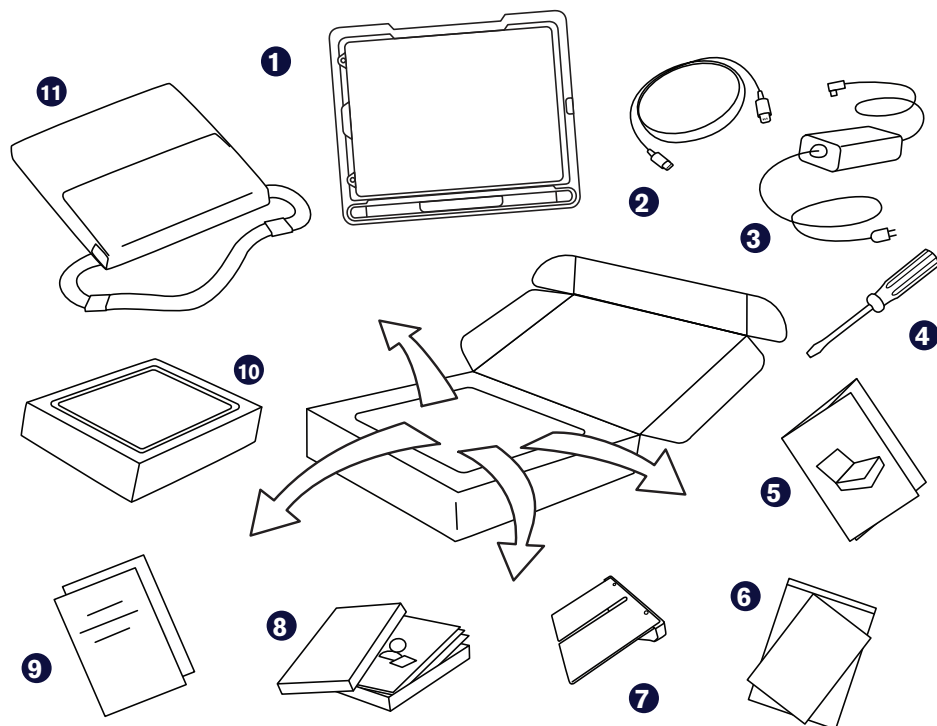

**1 Dispositivo preensamblado**  
(iPad Pro 12.9, base de TD Pilot, funda protectora, placa de montaje ConnectIT/Rehadapt, cable de conexión USB-C a USB-C, batería preinstalada)

**2 Cable de conexión Lightning a USB C**

**3 Cargador con cable**

**4 Desarmador**

**5 Guía de inicio**

**6 Documento sobre seguridad y conformidad**

**7 Soporte ajustable**

**8 Tarjetas de entrenamiento de TD Snap Core First**

**9 Documentos de garantía**

**10 Caja de iPad**  
(contiene un cargador de iPad)

**11 Bolsa de transporte**

# Empecemos

Esta Guía de inicio está diseñada para dos personas: aquella que usará el dispositivo para comunicarse y un asistente que puede tocar la pantalla y mover el dispositivo. Las secciones con el ícono de mano deben ser completadas por el asistente. Las secciones con el ícono de ojo deben ser completadas por la persona que accederá al dispositivo mediante la interacción con la mirada. Cuando haya completado los pasos de esta guía, la persona será capaz de usar la interacción con la mirada para comunicarse en la aplicación TD Snap.

Asistente




Usuario



## Botón de encendido/apagado

- 1 Conecte el cable del cargador al puerto de carga en el lado de la base de TD Pilot y, luego, conecte el cable de alimentación en un tomacorriente.
- 2 Presione el botón de encendido en la parte de atrás del TD Pilot para encenderlo.
- 3 Presione el botón de inicio en el iPad para encenderlo.
- 4 Siga las indicaciones en pantalla para configurar el iPad.

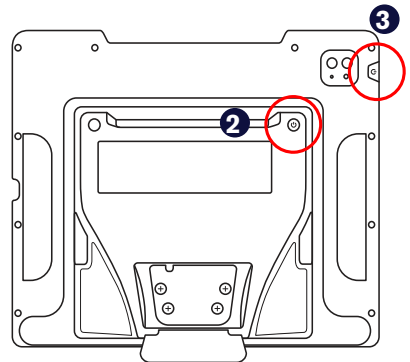

Cuando haya completado las indicaciones de configuración en el iPad, verá la pantalla de Inicio con los íconos de las aplicaciones.

## Configuración de TD Snap


- 1 Seleccione la aplicación **TD Snap**.




- 2 Siga las indicaciones para configurar su usuario de TD Snap. Recuerde elegir el método de acceso de interacción con la mirada.

# Montaje y colocación


Prepare al usuario para que empiece a usar el seguimiento visual colocándolo en una posición cómoda. Si usa anteojos, asegúrese de que los traiga puestos y de que las lentes estén limpias.

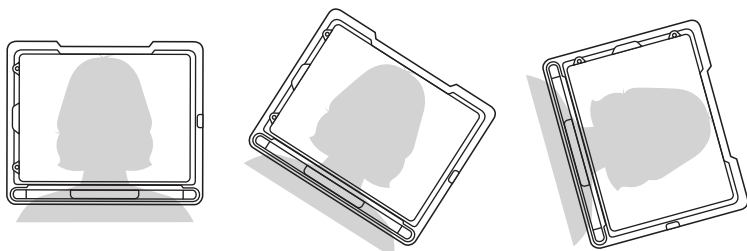

Coloque el TD Pilot en su sistema de montaje o en una superficie estable frente al usuario, al nivel de los ojos o ligeramente por debajo de este. Si la cabeza está inclinada a la izquierda o la derecha, incline el TD Pilot para que coincidan. Es importante que el ángulo de la superficie de la pantalla coincida con el ángulo de la cara del usuario. La mayoría de los usuarios, cuando están sentados en una mesa o escritorio, necesitarán acomodar el TD Pilot a un nivel más alto que la superficie de la mesa.

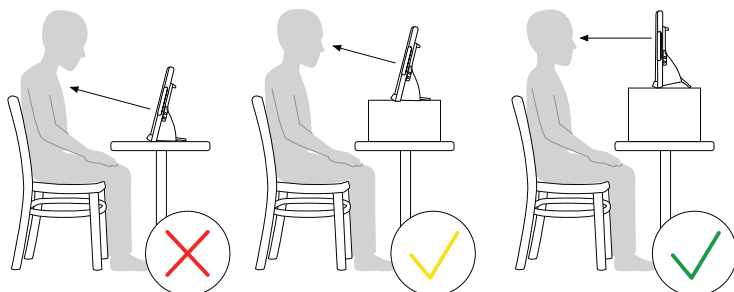

Es posible que necesite ajustar con detalle la posición del dispositivo durante los pasos de Calibración en la página siguiente. Ajuste siempre la posición del dispositivo de manera que se adapte al usuario, no al revés.

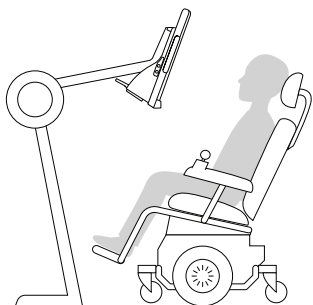

**Nota:** Un sistema de montaje es la mejor opción para acomodar con precisión el dispositivo y es fácil de ajustarse durante el día. Existen varias opciones de montaje, como los soportes para piso, para escritorio y para silla de ruedas. Visite [TobiiDynavox.com](https://www.tobii.com) o contacte a nuestro partner en su país.

# Calibración

- 1 Seleccione la aplicación **CoPilot**.



- 2 Siga las instrucciones en pantalla en CoPilot para calibrar el seguidor visual con los ojos del usuario.
- 3 Cuando el usuario haya terminado la calibración, deslice el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba para regresar a la pantalla de Inicio.

## ¡Listo!



Su TD Pilot ya está listo para ser usado. Abra TD Snap para empezar a comunicarse.



**Nota:** Si desea usar otras aplicaciones en lugar de TD Snap, consulte la sección sobre AssistiveTouch en el Manual del usuario de TD Pilot. Busque el Manual del usuario de TD Pilot en *TD CoPilot > Configuración > Ayuda > Manual del usuario*.

## Continúe con las tarjetas de entrenamiento de TD Snap

Continúe el proceso de configuración con las tarjetas de entrenamiento de TD Snap Core First que venían en la caja con su TD Pilot.

Las tarjetas de entrenamiento lo llevan a un recorrido por las funciones de TD Snap, la edición básica, la creación de copias de seguridad de sus datos y algunas actividades para ayudarle a integrar TD Snap en su vida diaria.



**Consejo:** Personalice su configuración de interacción con la mirada en TD Snap en *TD Snap > Editar > Usuario > Método de acceso*.

# Recursos adicionales

Escanee los códigos QR para usar los vínculos.



**Tobii Dynavox**

[es.tobiidynavox.com](https://es.tobiidynavox.com)



**Apple**

[apple.com/es/accessibility](https://apple.com/es/accessibility)



**myTobiiDynavox**

[mytobiidynavox.com](https://mytobiidynavox.com)



**Centro de aprendizaje  
de Tobii Dynavox  
(solo en inglés)**

[learn.tobiidynavox.com](https://learn.tobiidynavox.com)



**Comunidad de TD**

[grco.de/FB-Espanol](https://grco.de/FB-Espanol)



**Página de Soporte de  
TD Pilot**

[grco.de/PilotHelpES](https://grco.de/PilotHelpES)



**Manual del usuario  
de TD Pilot**

[grco.de/PilotDocs](https://grco.de/PilotDocs)



**Documentación**

*TD CoPilot >  
Configuración > Ayuda*



**Soporte técnico**

Norteamérica:  
1-800-344-1778 ext. 1

Resto del mundo:  
+46 8 522 950 20 ext. 1