

Tobii Dynavox Computer Control

Gebruikershandleiding



Gebruikershandleiding Tobii Dynavox Computer Control

Versie 1.0

11/2019

Alle rechten voorbehouden.

Copyright © Tobii AB (publ)

Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke wijze dan ook (elektronisch, met gebruik van fotokopieën en opnamen of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De geclaimde copyright-bescherming omvat alle vormen van auteursrechtelijk beschermd materiaal en auteursrechtelijk beschermde informatie volgens de wet of hierin toegestaan, inclusief en niet beperkt tot materialen gegenereerd door de softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals schermweergaven en menu's.

De informatie in dit document is eigendom van Tobii Dynavox. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tobii Dynavox is verboden.

Producten waarnaar in dit document wordt verwezen kunnen handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren. De uitgever en de auteur maken geen aanspraak op deze handelsmerken.

Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen in de voorbereiding van dit document, zijn de uitgever en de auteur niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen, noch voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in dit document of uit het gebruik van programma's en eventuele bijbehorende broncode. De uitgever en de auteur kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van winst of enige andere commerciële schade die direct of indirect is veroorzaakt of wordt vermoend te zijn veroorzaakt door dit document.

De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Raadpleeg de website van Tobii Dynavox

www.TobiiDynavox.com voor bijgewerkte versies van dit document.

Contactgegevens:

Tobii Dynavox AB
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Zweden
+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite
400
Pittsburgh, PA 15203
VS
+1-800-344-1778

Inhoudsopgave

1	Over ons Tobii Dynavox Computer Control	5
1.1	Beoogd gebruik.....	5
1.2	Systeemvereisten	5
2	Eerste keer opstarten	6
3	Overzicht van Tobii Dynavox Computer Control	9
3.1	Het Trace	9
3.2	Het Interaction Menu	10
3.3	Het Off-Screen Menu.....	11
3.4	Venster Trackstatus.....	14
4	Tobii Dynavox Computer Control gebruiken.....	15
4.1	De acties in het Interaction Menu.....	15
4.1.1	Hoe voer ik een actie uit met Tobii Dynavox Computer Control?.....	15
4.1.2	Hoe gebruik ik Schuiven in Tobii Dynavox Computer Control?	16
4.1.3	Hoe voer ik een klik met een rechtermuisknop uit in Tobii Dynavox Computer Control?	17
4.1.4	Hoe activeer ik het toetsenbord in Tobii Dynavox Computer Control?	17
4.1.4.1	Toetsenbord	18
4.1.5	Hoe gebruik ik Doel aanpassen in Tobii Dynavox Computer Control?.....	20
4.1.6	Hoe gebruik ik Klikken en slepen in Tobii Dynavox Computer Control?	20
4.1.7	Hoe gebruik ik Klikken met de linkermuisknop in Tobii Dynavox Computer Control?	21
4.1.8	Hoe gebruik ik Dubbelklikken in Tobii Dynavox Computer Control?	21
4.2	De acties in het Off-Screen Menu	22
4.2.1	Hoe activeer ik het Off-Screen Menu in Tobii Dynavox Computer Control?	22
4.2.2	Hoe activeer ik een actie in het Off-Screen Menu in Tobii Dynavox Computer Control?	23
4.2.3	Hoe ga ik naar Instellingen in Tobii Dynavox Computer Control?	23
4.2.4	Hoe activeer ik de Windows-tijdlijn in Tobii Dynavox Computer Control?	23
4.2.5	Hoe voer ik een Continue klik uit in Tobii Dynavox Computer Control?.....	24
4.2.6	Tobii Dynavox Computer Control pauzeren?	24
4.2.6.1	Hoe pauzeer ik oogbesturing in Tobii Dynavox Computer Control?	24
4.2.6.2	Hoe kan ik zien of de oogbesturing is gepauzeerd in Tobii Dynavox Computer Control?	25
4.2.6.3	Hoe hervat of heractiveer ik oogbesturing in Tobii Dynavox Computer Control?	25
4.2.7	Hoe voer ik een Snelle kalibratie uit in Tobii Dynavox Computer Control?	25
4.2.8	Hoe zet ik mijn apparaat in de slaapstand met Tobii Dynavox Computer Control?	26
5	Instellingen Computer Control	27
5.1	Activering	27
5.1.1	Volgen	27
5.1.1.1	Hoe selecteer ik Fixatietijd voor tracering in Tobii Dynavox Computer Control?	27
5.1.1.2	Hoe wijzig/selecteer ik Transparantie voor tracering in Tobii Dynavox Computer Control?	28
5.1.2	Knoppen	28

	5.1.2.1	Hoe wijzig/selecteer ik de dwelltijd voor de knoppen in Tobii Dynavox Computer Control?	28
5.2	Kalibratie		29
	5.2.1	Hoe werkt het kalibratieproces in Tobii Dynavox Computer Control?	29
	5.2.2	Hoe selecteer ik welk oog dat wordt gevolgd in Tobii Dynavox Computer Control?	31
	5.2.3	Hoe controleer ik de positionering van de gebruiker met Status volgen in Tobii Dynavox Computer Control?	31
	5.2.4	Hoe kalibreer ik een gebruik in Tobii Dynavox Computer Control?	32
5.3	Toetsenbord		32
	5.3.1	Hoe wijzig/selecteer ik de dwelltijd voor het toetsenbord in Tobii Dynavox Computer Control	32
	5.3.2	Hoe wijzig ik de toetsenbordtaal of stel ik deze in Tobii Dynavox Computer Control in?	33
	5.3.3	Hoe download ik nieuwe toetsenbordtalen in Tobii Dynavox Computer Control?	33
5.4	Algemeen		34
	5.4.1	Hoe selecteer ik de Applicatietaal voor Tobii Dynavox Computer Control?	34
	5.4.2	Hoe kopieer ik de Versie-informatie voor Tobii Dynavox Computer Control?	35
	5.4.3	Hoe selecteer ik Automatisch starten Tobii Dynavox Computer Control?	35
	5.4.4	Hoe neem ik deel aan het Programma voor vroegtijdige toegang voor Tobii Dynavox Computer Control?	35

1 Over ons Tobii Dynavox Computer Control

1.1 Beoogd gebruik

Oogbesturingstechnologie van Tobii Dynavox heeft duizenden personen met communicatie- en mobiliteitsproblemen geholpen om beter te communiceren en een onafhankelijker leven te leiden. Maar hoe zit het met degenen die verder willen gaan en hun computer optimaal willen gebruiken? Tobii Dynavox Computer Control is een nieuwe manier om uw computer te gebruiken en te bedienen met behulp van eyetracking en biedt een meer intuïtieve ervaring die ultieme onafhankelijkheid biedt. Oogbesturingstechnologie bestaat al vele jaren, maar Computer Control is anders omdat u niet alleen een computer met uw ogen kunt bedienen, maar het de meest intuïtieve en logische manier is om dit te doen. Met deze innovatieve aanpak, die 'Interaction First' wordt genoemd, kunt u uw computer eenvoudig en op uw eigen tempo gebruiken. Daarnaast kunt u ook gebruikmaken van uw favoriete software, zoals browsers, e-mailprogramma's en games.

Met Interaction First kunnen gebruikers het object selecteren dat ze willen gebruiken voordat ze beslissen wat ze willen doen. Dit is een natuurlijker en intuïtiever gedrag en helpt het aantal mislukte pogingen te verminderen.

Neem de volledige controle over uw computer door alleen uw ogen te gebruiken. U kunt alle types muis- en veegacties emuleren en in tekst typen met onze software. We hebben ook slimme snelkoppelingen toegevoegd om het nog makkelijker te maken om toegang te krijgen tot alle delen van Windows!


1.2 Systeemvereisten

Component	Vereisten
Computer en processor	i5-4200U, 1,60 GHz (4de generatie i5 met twee kernen / 4 threads)
Geheugen (RAM)	8 gigabyte (GB) RAM (aanbevolen minimum).
Vaste schijf	500 megabyte (MB) beschikbaar
Besturingssysteem	Windows 10
.NET-versie	4.7.2
Eyetracker	Tobii Dynavox I-Series I-13 en I-16
Aanvullende vereisten en overwegingen	Een internetverbinding wordt aanbevolen voor het ontvangen van updates.


2 Eerste keer opstarten

Wanneer Computer Control voor de eerste keer wordt gestart, moet de gebruiker het introductieproces doorlopen. Het introductieproces bestaat uit deze stappen:

1. Het opstartscherm
2. Het welkomstscherm.
3. Het trackstatusscherm (om weer te geven hoe de gebruiker gepositioneerd is voor de eyetracker.) (Zie 3.4 *Venster Trackstatus*, pagina 14 voor meer informatie).
4. Kalibratiescherm (zie 3.4 *Venster Trackstatus*, pagina 14 voor meer informatie).
5. Servicevoorwaardenscherm
6. Scherm snelstarthandleiding

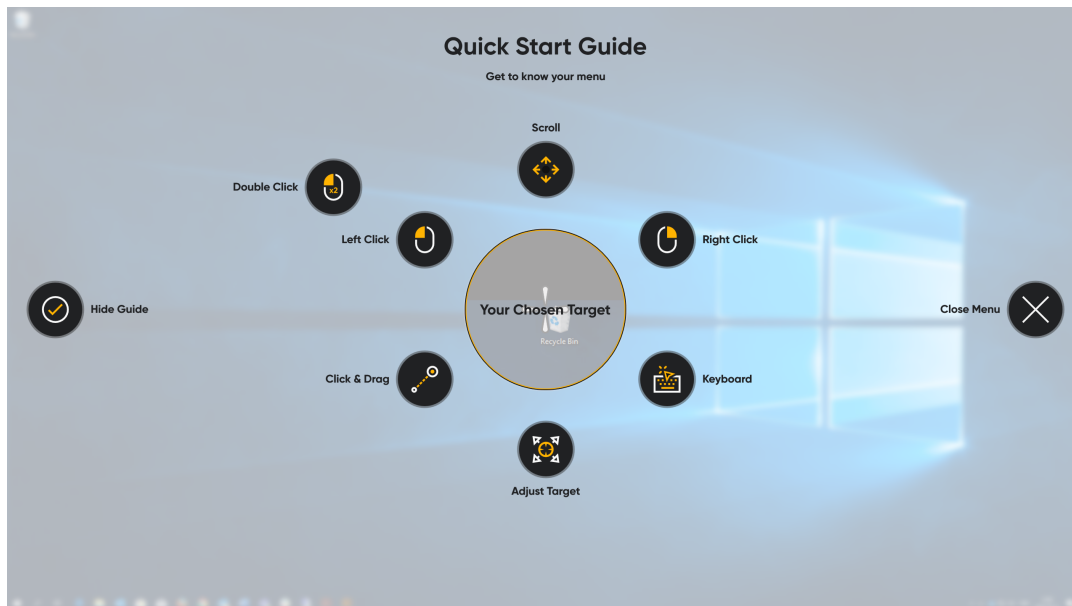

Wanneer u de knop  (Gids verbergen) in de snelstarthandleiding selecteert, wordt onderaan het midden van het scherm een bericht weergegeven met informatie over hoe u het Off-Screen Menu kunt openen.

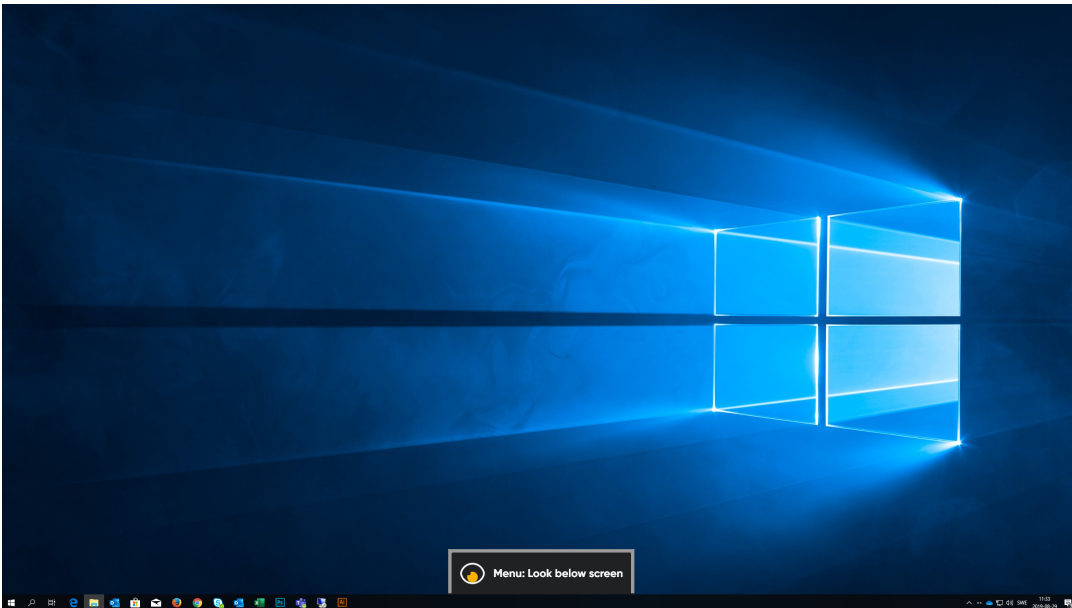

Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

De pop-up  Menu: Look below screen verschijnt wanneer het pictogram  (Off-Screen Menu) door de gebruiker is geselecteerd.

De eerste keer dat de gebruiker het pictogram  (Off-Screen Menu) selecteert, wordt de snelstarthandleiding voor het Off-Screen Menu weergegeven.




Selecteert de knop  (Gids verbergen) in de snelstarthandleiding om de snelstarthandleiding af te sluiten.

3 Overzicht van Tobii Dynavox Computer Control

3.1 Het Trace

De tracering volgt de blik van de gebruiker. Deze wordt zichtbaar wanneer de gebruiker de blik fixeert en de Activering wordt ook zichtbaar. De tracering is minder ondoorzichtig totdat de gebruiker de blik heeft gericht, waarna deze effen wordt en de Activering weergeeft. De Activering wijst altijd naar het midden van het scherm, waar het Interaction Menu zich bevindt. Het gebied tussen de kleine en de grote cirkels wordt vergrendeld op de positie van het scherm waar de tracering zich bevindt wanneer de gebruiker de blik fixeert en er wordt een momentopname van het gebied in de tracering weergegeven in het doelgebied van de tracering. Wanneer de gebruiker de tracering sluit, wordt de momentopname weergegeven en keert de tracering terug naar de inactieve status. De tracering werkt op alle achtergrondtypen.

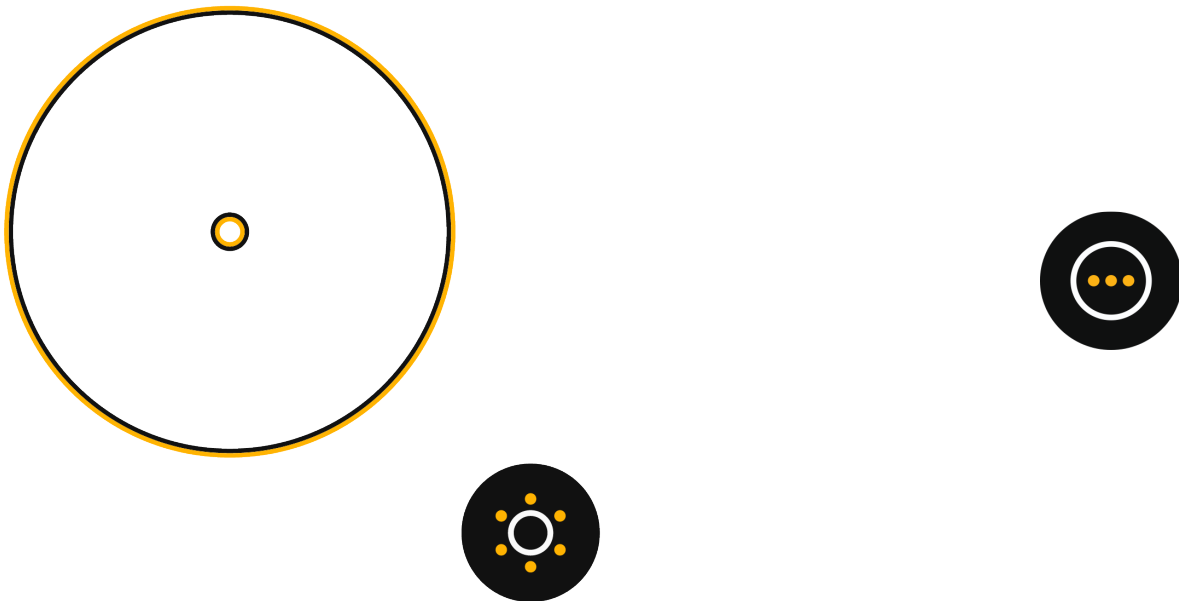


Afbeelding 3.1 De actieve tracering

Tabel 3.1 De tracering

Element	Actie	Beschrijving
	De tracering	De tracering geeft de gebruiker feedback over waar de blik van de gebruiker op het scherm zich bevindt. De tracering beweegt over het scherm en volgt de blik van de gebruiker. Wanneer de gebruiker de blik gedurende een ingestelde tijd op het scherm richt, wordt de Activering weergegeven.
	Activering	Opent het Interaction Menu. Zie 3.2 <i>Het Interaction Menu</i> , pagina 10.voor meer informatie.
	Off-Screen Menu	Opent het Off-Screen Menu. Zie 3.3 <i>Het Off-Screen Menu</i> , pagina 11 voor meer informatie.

3.2 Het Interaction Menu

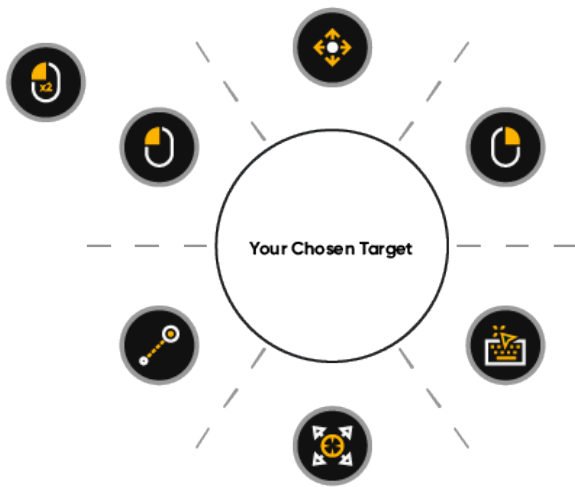


De grote cirkel, met het dradenkruis in het midden en in het midden van het Interaction Menu, is een ingezoomde momentopname van het doelgebied. Het dradenkruis kan nauwkeurig worden afgesteld, zodat deze precies op het gewenste punt in het doelgebied kan worden gericht. In *Tabel 3.2 Interaction Menu, pagina 10* worden alle beschikbare acties in het Interaction Menu uitgelegd.

Tabel 3.2 Interaction Menu

Pictogram	Actie	Beschrijving
	Schuiven	Actie waarmee, als deze wordt uitgevoerd in een venster waarin kan worden geschoven, u met uw blik de pagina kunt schuiven. • Kijk naar een gebied waarin kan worden geschoven en laat uw blik erop rusten. Het Interaction Menu wordt geopend. • Selecteer de actie Schuiven. • Kijk boven het schuifanker om omhoog te schuiven. • Kijk onder het schuifanker om omlaag te schuiven. • Kijk links van het schuifanker om naar links te schuiven. • Kijk rechts van het schuifanker om naar rechts te schuiven. • Kijk naar de knop Afsluiten aan de rechterkant om de schuifactie af te sluiten.  Gebruik de taak Schuiven met blik om horizontaal te schuiven in Modern UI-apps en in het Modern UI Windows-startscherm. Zie 4.1.2 <i>Hoe gebruik ik Schuiven in Tobii Dynavox Computer Control?</i>, pagina 16 voor meer informatie
	Met rechts klikken	Actie waarmee u een keer met de rechtermuisknop klikt. Zie 4.1.3 <i>Hoe voer ik een klik met een rechtermuisknop uit in Tobii Dynavox Computer Control?</i>, pagina 17 voor meer informatie
	Toetsenbord	Actie waarmee een toetsenbord op het scherm voor typen met blik wordt geopend. Deze actie benadrukt de plek waar de gebruiker de actie uitvoert, wat betekent dat er met de linkermuisknop wordt geklikt en het toetsenbord vervolgens wordt geopend. Zie 4.1.4 <i>Hoe activeer ik het toetsenbord in Tobii Dynavox Computer Control?</i>, pagina 17 voor meer informatie.

Pictogram	Actie	Beschrijving
	Doel aanpassen	Actie voor het nauwkeurig afstellen van het interactiedoel op het scherm. • Kijk naar de positie waar u een actie wilt uitvoeren om het Interaction Menu te openen. • Kijk naar de actie Doelaanpassing • Stel het doelgebied nauwkeurig af door het dradenkruis met uw blik in het doelvenster te verplaatsen om het exacte gewenste punt te raken. • Selecteer de actie die u wilt uitvoeren. Zie 4.1.5 Hoe gebruik ik Doel aanpassen in Tobii Dynavox Computer Control?, pagina 20 voor meer informatie
	Klikken en slepen	Actie waarmee u een klik uitvoert, vasthoudt en sleept en loslaat, waarbij de eerste actie de beginpositie voor het slepen en de tweede klik de neerzetpositie aangeeft (om objecten te verplaatsen of gebieden te selecteren). • Kijk naar het object dat u wilt verplaatsen. • Selecteer de actie Klikken en slepen • Kijk naar de neerzetpositie voor het object. • Selecteer het pictogram Neerzetten dat op het scherm verschijnt wanneer u uw blik op de neerzetpositie gericht houdt. Zie 4.1.6 Hoe gebruik ik Klikken en slepen in Tobii Dynavox Computer Control?, pagina 20 voor meer informatie
	Met links klikken	Actie waarmee u een keer met de linkermuisknop klikt of, voor apparaten met aanraakbediening, een keer met de vinger tikt. Zie 4.1.7 Hoe gebruik ik Klikken met de linkermuisknop in Tobii Dynavox Computer Control?, pagina 21 voor meer informatie
	Dubbelklikken	Actie waarmee u dubbelklikt. Zie 4.1.8 Hoe gebruik ik Dubbelklikken in Tobii Dynavox Computer Control?, pagina 21 voor meer informatie
	Hulp	Actie waarmee u een hulppagina opent.
	Annuleren	Actie waarmee u het Interaction Menu annuleert.

3.3 Het Off-Screen Menu

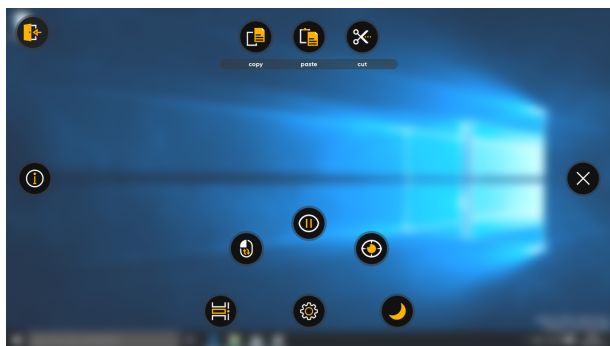

Afbeelding 3.2 Het Off-Screen Menu.

Tabel 3.3 Het Off-Screen Menu

Picto-gram	Actie	Beschrijving
	Instellingen	Actie die de Computer Control Instellingen opent. <i>Zie 5 Instellingen Computer Control voor meer informatie.</i>
	Continu klikken	Actie waarmee u de actie Continu klikken activeert. - Kijk naar de knop Off-Screen Menu om het Off-Screen Menu te openen. - Selecteer de actie Continu klikken. - Kijk naar het gewenste punt/gebied en houd uw blik erop gericht. Het menu Continu klikken wordt geopend. - Selecteer de actie Links klikken om met de linkermuisknop te klikken. - Herhaal de bovenstaande stappen totdat u gereed bent en selecteer de knop Actie annuleren. <i>Zie voor meer informatie</i>
	Pauze	Actie die de interactie pauzeert totdat de knop Besturing starten is geselecteerd.
	Snelle kalibratie	Actie waarmee de Snelle kalibratie opent. <i>Zie 4.2.7 Hoe voer ik een Snelle kalibratie uit in Tobii Dynavox Computer Control?</i> voor meer informatie
	Windows-tijdlijn	Actie waarmee u de Windows-tijdlijn activeert. - Kijk naar de knop Off-Screen Menu om het Off-Screen Menu te openen. - Selecteer de actie Windows-tijdlijn. - Selecteert de applicatie die u wilt activeren door uw blik op die applicatie te richten. <i>Zie 4.2.4 Hoe activeer ik de Windows-tijdlijn in Tobii Dynavox Computer Control?, pagina 23 voor meer informatie.</i>


Picto-gram	Actie	Beschrijving
	Computer Control afsluiten	Actie waarmee u de Computer Control-software afsluit.
	Annuleren	Actie waarmee u het Off-Screen Menu annuleert.



Tabel 3.4 Sneltoetsenpaneel

Picto-gram	Actie	Beschrijving
	kopiëren	Actie waarmee u het geselecteerde item/de geselecteerde tekst kopieert.
	plakken	Actie waarmee u het gekopieerde/geknippte item/tekst plakt.
	knippen	Actie waarmee u het geselecteerde item/de geselecteerde tekst kopieert.

3.4 Venster Trackstatus

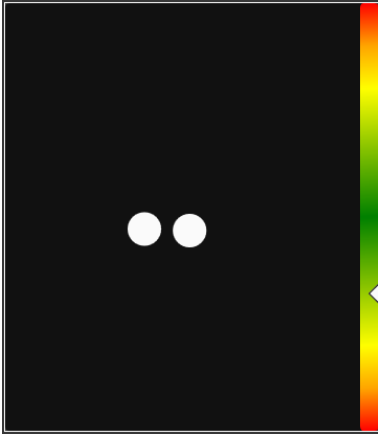

Afbeelding 3.3 Venster Trackstatus

De **trackstatus**-functie wordt gebruikt om te controleren of de gebruiker goed gepositioneerd is voor de eyetracker.

- De twee (2) witte stippen - De ogen van de gebruikers en hoe ze ten opzichte van het scherm staan. Voor een optimale positie moeten de witte stippen in het midden van het zwarte gebied bevinden.
- De kleurrijke balk aan de rechterkant met de witte pijl: hoe ver of dicht de gebruiker zich van het scherm bevindt.
 - Als de witte pijl in het midden van het groene gedeelte van de balk staat, bevindt de gebruiker zich op de optimale afstand tot het scherm.
 - Als de pijl in het onderste gedeelte van de balk staat: plaats de gebruiker dichterbij.
 - Als de pijl op het bovenste gedeelte van de balk staat: laat de gebruiker verder van de eyetracker zitten.

4 Tobii Dynavox Computer Control gebruiken

Tobii Dynavox Computer Control maakt het mogelijk voor de gebruiker om de standaard Windows omgeving te bedienen via een selectiemethode in twee stappen, waardoor de kans op ongewenst klikken afneemt.



De meeste functies in Computer Control zijn geschikt voor Aanraken en Muis, waardoor een zorgverlener of assistent de gebruiker indien nodig gemakkelijker hulp kan bieden. Het is hiermee veel eenvoudiger voor de zorgverlener of assistent om een actie te selecteren of de instellingen voor de gebruiker te wijzigen.

Deze functies/acties kunnen niet worden uitgevoerd zonder een eyetracker:


- Toegang krijgen tot het Interaction Menu
- Toegang krijgen tot het Off-Screen Menu
- Toegang krijgen tot de knop Doorgaan

4.1 De acties in het Interaction Menu

4.1.1 Hoe voer ik een actie uit met Tobii Dynavox Computer Control?

1. Richt uw blik op het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de actie wilt uitvoeren.

2. Selecteer het pictogram  (Activator).
Het Interaction Menu wordt geopend

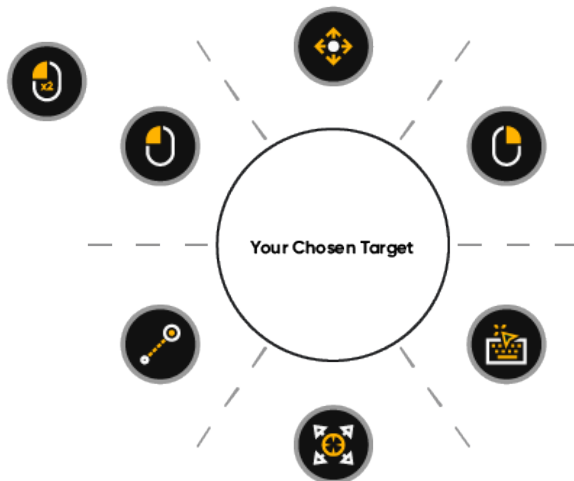

3. Het dradenkruis in het midden van het doelvenster geeft aan waar de actie wordt uitgevoerd. Stel indien nodig het activeringspunt bij door deze stappen te volgen.

- a. Selecteer het pictogram  (Doel aanpassen).
- b. Verplaats met uw blik de eenvoudige tracering in het doelvenster totdat u het precieze punt van uw keuze selecteert.
Het dradenkruis wordt naar de nieuwe positie verplaatst
- c. Herhaal dit totdat het gewenste doel zich in het dradenkruis bevindt.

4. Selecteer de uit te voeren actie in het Interaction Menu of selecteer de knop (sluiten) om te annuleren.


4.1.2 Hoe gebruik ik **Schuiven** in Tobii Dynavox Computer Control?




1. Richt uw blik op het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de actie wilt uitvoeren.
2. Selecteer het pictogram  (Activator). Het Interaction Menu wordt geopend.
3. Het dradenkruis in het midden van het doelvenster geeft aan waar de actie wordt uitgevoerd. Stel indien nodig het activeringspunt bij door deze stappen te volgen.

- a. Selecteer het pictogram  (Doel aanpassen).
- b. Verplaats met uw blik de eenvoudige tracing in het doelvenster totdat u het precieze punt van uw keuze selecteert. Het dradenkruis wordt naar de nieuwe positie verplaatst.
- c. Herhaal dit totdat het gewenste doel zich in het dradenkruis bevindt.

4. Selecteer het pictogram  om Interaction Menu te openen.

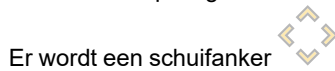

Er wordt een schuifanker geplaatst op het scherm waar de schuifactie moet worden gebruikt.

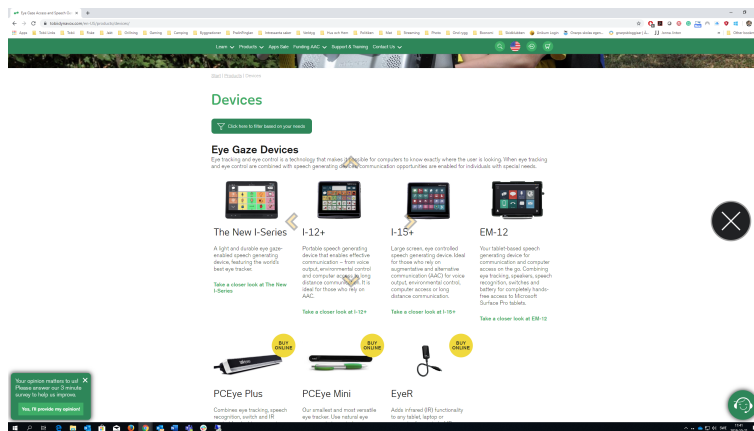

Afbeelding 4.1 Schuifanker zichtbaar op het scherm

5. Selecteer de manier waarop u wilt schuiven:
 - Kijk boven het schuifanker om omhoog te schuiven.
 - Kijk onder het schuifanker om omlaag te schuiven.
 - Kijk links van het schuifanker om naar links te schuiven.
 - Kijk rechts van het schuifanker om naar rechts te schuiven.
 - Kijk in het gebied rond het schuifanker om het scrollen te pauzeren.

6. Selecteer de knop  (Sluiten) om te stoppen met schuiven.

4.1.3 Hoe voer ik een **klik met een rechtermuisknop** uit in Tobii Dynavox Computer Control?



1. Richt uw blik op het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de actie wilt uitvoeren.
2. Selecteer het pictogram  (Activator).
Het Interaction Menu wordt geopend
3. Het dradenkruis in het midden van het doelvenster geeft aan waar de actie wordt uitgevoerd.
Stel indien nodig het activeringspunt bij door deze stappen te volgen.
 - a. Selecteer het pictogram  (Doel aanpassen).
 - b. Verplaats met uw blik de eenvoudige tracering in het doelvenster totdat u het precieze punt van uw keuze selecteert.
Het dradenkruis wordt naar de nieuwe positie verplaatst
 - c. Herhaal dit totdat het gewenste doel zich in het dradenkruis bevindt.
4. Selecteer het pictogram  om Interaction Menu te openen.

4.1.4 Hoe activeer ik het **toetsenbord** in Tobii Dynavox Computer Control?



1. Richt uw blik op het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de actie wilt uitvoeren.
2. Selecteer het pictogram  (Activator).
Het Interaction Menu wordt geopend
3. Het dradenkruis in het midden van het doelvenster geeft aan waar de actie wordt uitgevoerd.
Stel indien nodig het activeringspunt bij door deze stappen te volgen.
 - a. Selecteer het pictogram  (Doel aanpassen).
 - b. Verplaats met uw blik de eenvoudige tracering in het doelvenster totdat u het precieze punt van uw keuze selecteert.
Het dradenkruis wordt naar de nieuwe positie verplaatst
 - c. Herhaal dit totdat het gewenste doel zich in het dradenkruis bevindt.
4. Selecteer het pictogram  om Interaction Menu te openen.
5. Gebruik indien nodig de knoppen  (Toetsenbord omhoog verplaatsen) of  (Toetsenbord omlaag verplaatsen) om het toetsenbord te verplaatsen.


4.1.4.1 Toetsenbord

Door de  toetsenbordfunctie in het Interaction Menu te selecteren, wordt het toetsenbord als schermtoetsenbord geopend. Het toetsenbord wordt altijd geopend aan de andere kant van het scherm waar u acties hebt uitgevoerd. Het is mogelijk om het toetsenbord te verplaatsen met de knoppen  (Toetsenbord omhoog verplaatsen) of  (Toetsenbord omlaag verplaatsen) als het toetsenbord actief is op het scherm.


Het toetsenbord bestaat uit vier (4) toetsenbordpagina's. De gebruiker kan gemakkelijk schakelen tussen de verschillende toetsenbordpagina's door de knop ,  of  in de rechterbovenhoek van het toetsenbord of de knop  in de linkerbovenhoek op de pagina's Nummers en Uitgebreid te selecteren.

De toets op het toetsenbord waar de gebruiker naar kijkt, wordt aangegeven door een lichtkleurig kader rond het teken/de functie  op de toets en wanneer de toets wordt geselecteerd, verandert deze kort van kleur in de ingestelde activeeringskleur .


Dit zijn de vier toetsenbordpagina's:

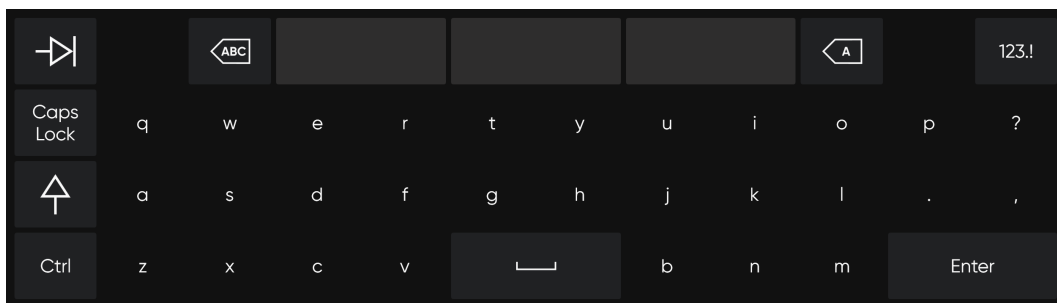


Afbeelding 4.2 Standaard

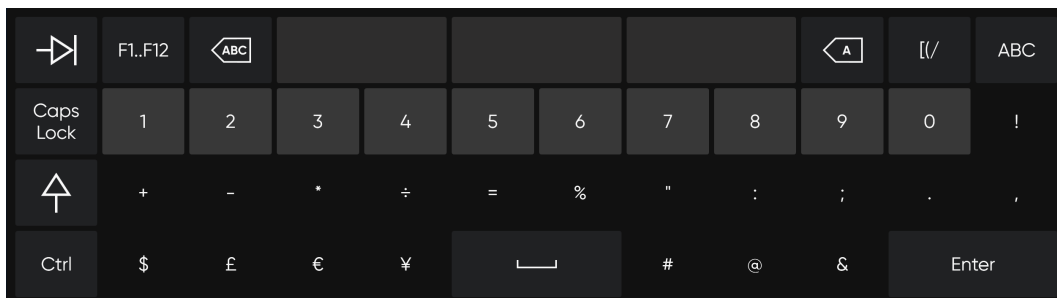

Afbeelding 4.3 Nummers

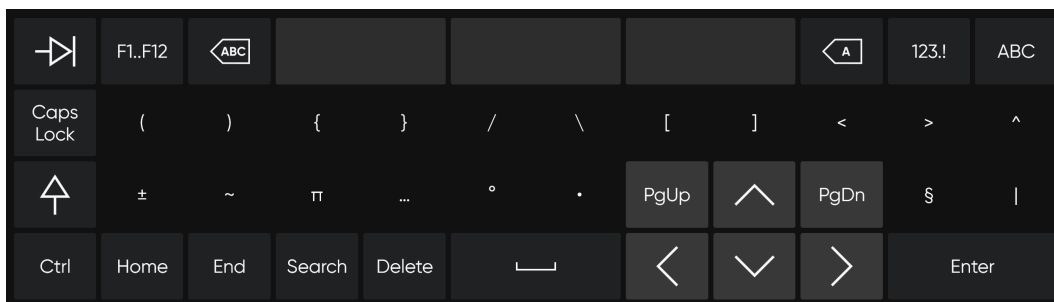

Afbeelding 4.4 Uitgebreid

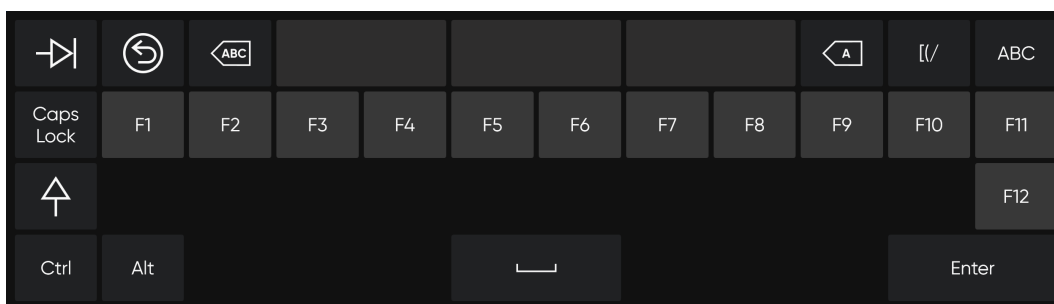


Afbeelding 4.5 Functietoetsen

Zie 5 *Instellingen Computer Control*, pagina 27 om de taal van het toetsenbord te wijzigen en andere instellingen voor het toetsenbord.

4.1.4.1.1 Woordvoorspelling

De engine voor woordvoorspelling die in Computer Control wordt gebruikt, is afkomstig van SwiftKey en wordt veel gebruikt op tablets en smartphones. SwiftKey maakt gebruik van verschillende technologieën voor kunstmatige intelligentie, waarmee het volgende woord dat de gebruiker wil typen, kan worden voorspeld. SwiftKey leert van eerdere teksten die de gebruiker heeft geschreven en biedt voorspellingen op basis van de momenteel ingevoerde tekst en eerder ingevoerde tekst. De taal voor woordvoorspelling varieert naargelang de instelling van Toetsenbordtaal.

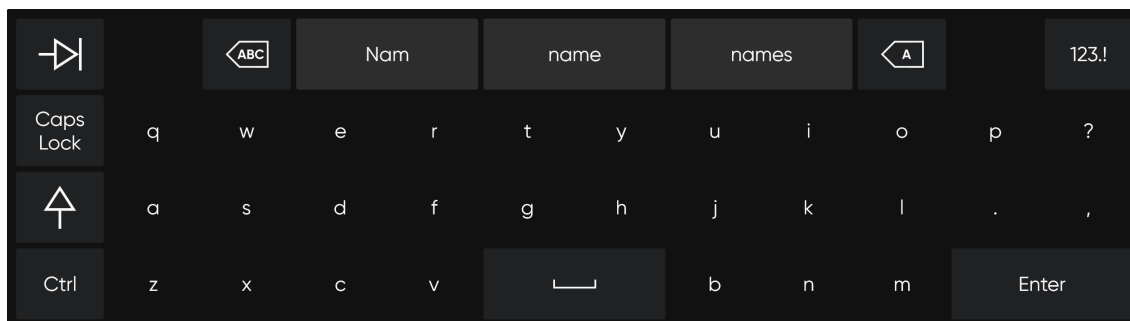

Afbeelding 4.6 Toetsenbord met woordvoorspelling geactiveerd

Wanneer u woordvoorspelling gebruikt, worden er drie (3) vakjes weergegeven boven het toetsenbord. Het meest linkse vakje geeft het meest waarschijnlijke voorspeld woord weer en de overige twee (2) vakjes bevatten elk één voorspeld woord. U kunt een voorspeld woord selecteren door het betreffende vakje te selecteren. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, typt u gewoon verder en hopelijk wordt het betreffende woord na invoer van het volgende teken weergegeven.



Als u Woordvoorspelling gebruikt en een woord met een accent, zoals café, wilt typen, is het vaak makkelijker om het accent over te laten aan Woordvoorspelling. Typ gewoon "cafe" en een van de suggesties is dan "café".

4.1.5 Hoe gebruik ik **Doel aanpassen** in Tobii Dynavox Computer Control?



De actie Doel aanpassen wordt gebruikt om het activeringspunt in het doelvenster fijn af te stellen. Het dradenkruis in het midden van het doelvenster geeft aan waar de actie wordt uitgevoerd.


Stel het activeringspunt bij door deze stappen te volgen.

1. Selecteer het pictogram  (Doel aanpassen).
2. Verplaats met uw blik de eenvoudige trasering in het doelvenster totdat u het precieze punt van uw keuze selecteert.
Het dradenkruis wordt naar de nieuwe positie verplaatst
3. Herhaal dit totdat het gewenste doel zich in het dradenkruis bevindt.


4.1.6 Hoe gebruik ik **Klikken en slepen** in Tobii Dynavox Computer Control?



1. Richt uw blik op het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de actie wilt uitvoeren.
2. Selecteer het pictogram  (Activator).
Het Interaction Menu wordt geopend
3. Het dradenkruis in het midden van het doelvenster geeft aan waar de actie wordt uitgevoerd.
Stel indien nodig het activeringspunt bij door deze stappen te volgen.
 - a. Selecteer het pictogram  (Doel aanpassen).
 - b. Verplaats met uw blik de eenvoudige trasering in het doelvenster totdat u het precieze punt van uw keuze selecteert.
Het dradenkruis wordt naar de nieuwe positie verplaatst
 - c. Herhaal dit totdat het gewenste doel zich in het dradenkruis bevindt.
4. Selecteer het pictogram  om Interaction Menu te openen.
5. Selecteer de nieuwe locatie voor het object.
Er wordt een indicatielijn weergegeven tussen de eerdere locatie en de nieuwe locatie van de trasering.

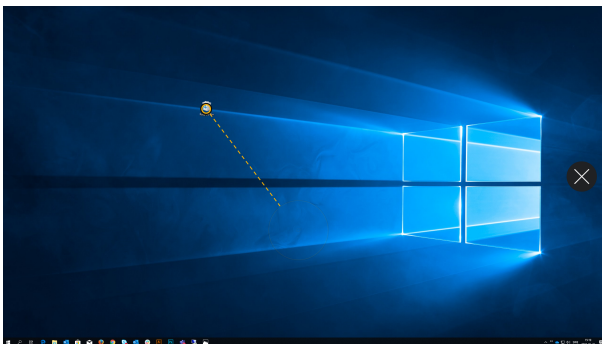

- Richt de blik op de nieuwe locatie.
Een wordt een pictogram Neerzetten weergegeven op het scherm buiten de trace.

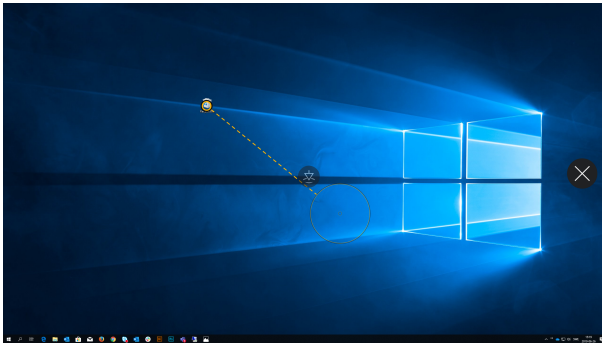

- Selecteer de actie  (Neerzetten) om het object op de nieuwe locatie neer te zetten.
- Het object bevindt zich nu op de nieuwe locatie.

4.1.7 Hoe gebruik ik **Klikken met de linkermuisknop** in Tobii Dynavox Computer Control?



- Richt uw blik op het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de actie wilt uitvoeren.
- Selecteer het pictogram  (Activator).
Het Interaction Menu wordt geopend
- Het dradenkruis in het midden van het doelvenster geeft aan waar de actie wordt uitgevoerd.
Stel indien nodig het activeringspunt bij door deze stappen te volgen.
 - Selecteer het pictogram  (Doel aanpassen).
 - Verplaats met uw blik de eenvoudige tractering in het doelvenster totdat u het precieze punt van uw keuze selecteert.
Het dradenkruis wordt naar de nieuwe positie verplaatst
 - Herhaal dit totdat het gewenste doel zich in het dradenkruis bevindt.
- Selecteer het pictogram  om Interaction Menu te openen.

4.1.8 Hoe gebruik ik **Dubbelklikken** in Tobii Dynavox Computer Control?



- Richt uw blik op het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de actie wilt uitvoeren.
- Selecteer het pictogram  (Activator).
Het Interaction Menu wordt geopend

3. Het dradenkruis in het midden van het doelvenster geeft aan waar de actie wordt uitgevoerd. Stel indien nodig het activeringspunt bij door deze stappen te volgen.

- a. Selecteer het pictogram  (Doel aanpassen).
- b. Verplaats met uw blik de eenvoudige trasering in het doelvenster totdat u het precieze punt van uw keuze selecteert.
Het dradenkruis wordt naar de nieuwe positie verplaatst
- c. Herhaal dit totdat het gewenste doel zich in het dradenkruis bevindt.

4. Selecteer het pictogram  om Interaction Menu te openen.


4.2 De acties in het Off-Screen Menu

4.2.1 Hoe activeer ik het Off-Screen Menu in Tobii Dynavox Computer Control?


Het Off-Screen Menu menu is verborgen, zodat het de gebruiker niet stoort en/of afleidt. Volg deze stappen om het Off-Screen Menu op te roepen.

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

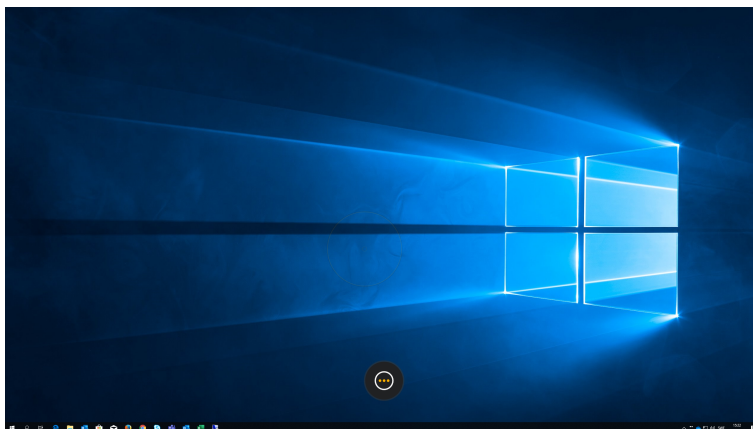

2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu).
Het Off-Screen Menu wordt geopend

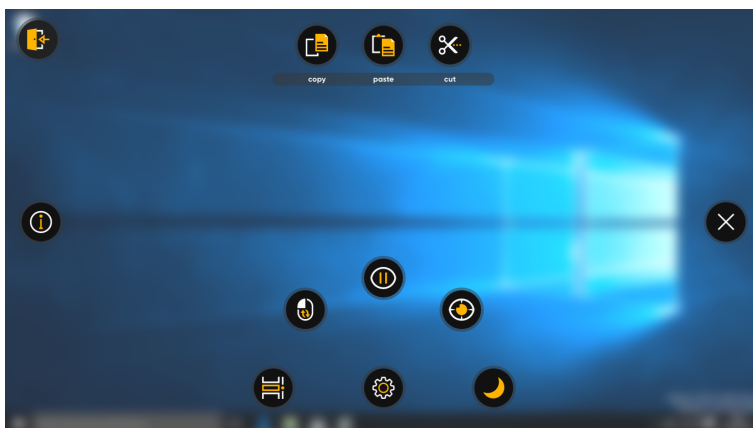


4.2.2 Hoe activeer ik een actie in het Off-Screen Menu in Tobii Dynavox Computer Control?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.

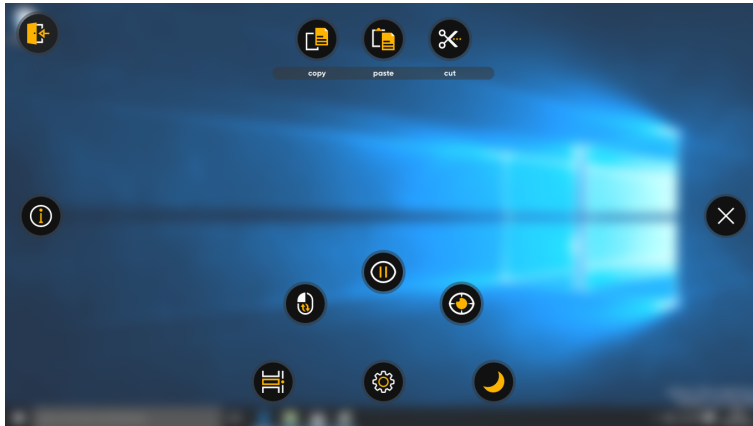

3. Selecteer de uit te voeren actie in het Off-Screen Menu of selecteer de knop Sluiten om te annuleren.

4.2.3 Hoe ga ik naar **Instellingen** in Tobii Dynavox Computer Control?



1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.

3. Selecteer de actie  (Instellingen) om naar de instellingen te gaan voor Tobii Dynavox Computer Control. Zie *5 Instellingen Computer Control, pagina 27* voor meer informatie over de beschikbare instellingen

4.2.4 Hoe activeer ik de **Windows-tijdlijn** in Tobii Dynavox Computer Control?

Met de Windows-tijdlijn kan de gebruiker schakelen tussen de software die op het apparaat actief is.


1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.

3. Selecteer de actie  (Windows-tijdlijn).

De Windows-tijdlijn wordt geopend

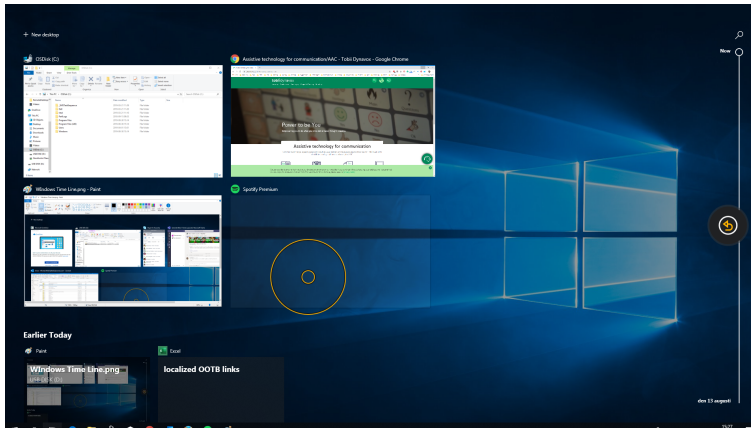

4. Selecteer een van de volgende functies:
 - Selecteer de gewenste te activeren applicatie op de Windows-tijdlijn
 - Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar Computer Control.

4.2.5 Hoe voer ik een Continue klik uit in Tobii Dynavox Computer Control?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.
3. Selecteer de actie  (Continu klikken).
4. Richt uw blik op het gewenste deel van het scherm (of pictogram op het scherm) waar u de actie wilt uitvoeren.
5. Selecteer de actie  (Klikken met de linkermuisknop).
6. Herhaal stappen 4 — 5 zoveel keer als u wilt.
7. Selecteer het pictogram  (Sluiten) om de actie Continu klikken te stoppen.

4.2.6 Tobii Dynavox Computer Control pauzeren?


4.2.6.1 Hoe pauzeer ik oogbesturing in Tobii Dynavox Computer Control?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.



2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.
3. Selecteer de actie  (Pauzeren).

Er wordt kort een  oranje pauzepictogram weergegeven op het scherm en verschijnt een oranje rand aan de buitenranden van het scherm om aan te geven dat Computer Control gepauzeerd is.

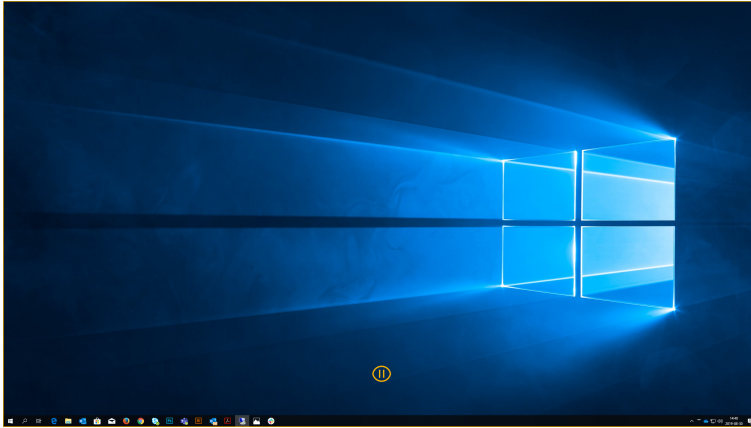

4.2.6.2 Hoe kan ik zien of de oogbesturing is gepauzeerd in Tobii Dynavox Computer Control?

Er verschijnt een oranje rand aan de buitenranden van het scherm.

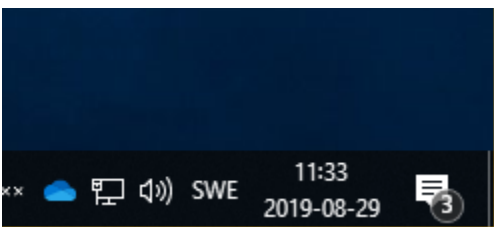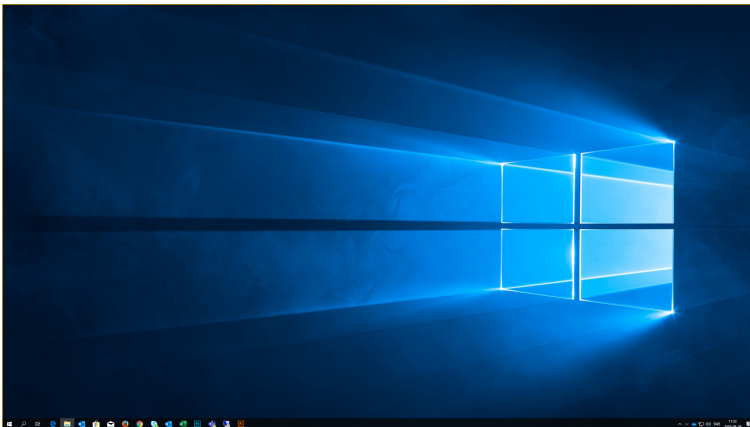

4.2.6.3 Hoe hervat of heractiveer ik oogbesturing in Tobii Dynavox Computer Control?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Besturing starten) wordt zichtbaar in het onderste deel van het scherm.


2. Selecteer het pictogram  (Besturing starten) om Tobii Dynavox Computer Control te hervatten / heractiveren

4.2.7 Hoe voer ik een **Snelle kalibratie** uit in Tobii Dynavox Computer Control?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.
3. Selecteer de actie  (Snelle kalibratie).
4. Test uw kalibratie door naar de verschillende doelen te kijken.

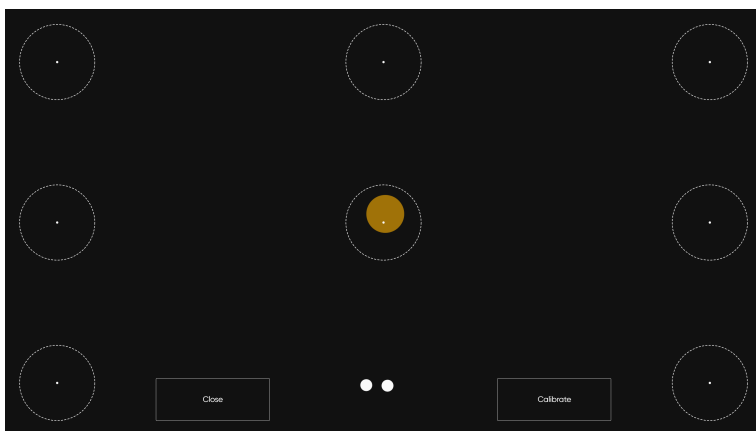

5. Selecteer indien nodig de knop **Kalibreren**.
6. Kijk één voor één naar de oranje stippen die op het scherm worden weergegeven tot ze verdwijnen.
7. Probeer de nieuwe kalibratie uit.
8. Herhaal stap 7–9 tot u tevreden bent.
9. Selecteer de **Sluiten**-knop.

Zie 5.2.1 *Hoe werkt het kalibratieproces in Tobii Dynavox Computer Control?*, pagina 29 voor meer informatie over kalibratie


4.2.8 Hoe zet ik mijn apparaat in de slaapstand met Tobii Dynavox Computer Control?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.


2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu).
3. Selecteer het pictogram  (Slapen).
4. Selecteer één van de volgende acties:
 - **Slapen**: om het apparaat in de slaapstand te zetten.
 - **Annuleren**: om het in slaapstand zetten van het apparaat te annuleren.

5 Instellingen Computer Control

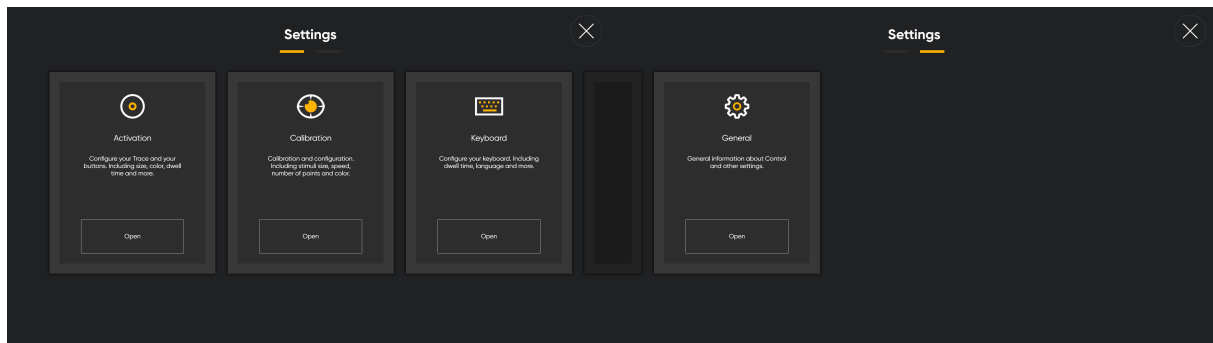

Pictogrammen	Actie	Beschrijving
	Activering	Opent de Activering en Feedback -instellingen. Zie 5.1 Activering , pagina 27 voor meer informatie.
	Kalibratie	Opent de Kalibratie -instellingen. Zie 5.2 Kalibratie , pagina 29 voor meer informatie.
	Toetsenbord	Opent de Toetsenbord -instellingen. Zie 5.3 Toetsenbord , pagina 32 voor meer informatie.
	Algemeen	Opent de Algemene instellingen. Zie 5.4 Algemeen , pagina 34 voor meer informatie.

5.1 Activering

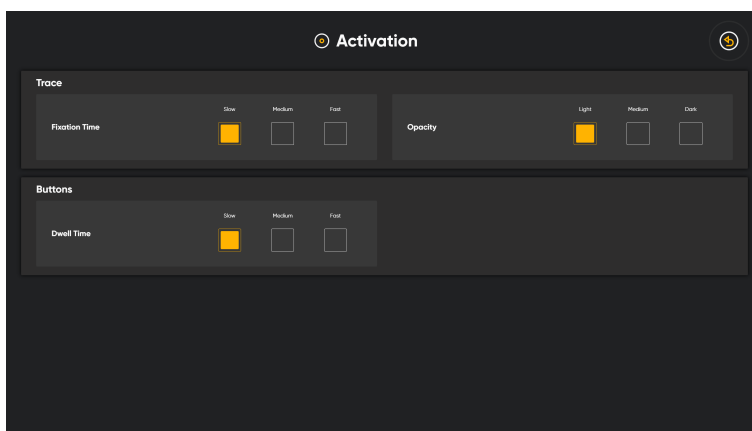

5.1.1 Volgen

In het gedeelte Tracering kan de gebruiker de grootte, kleur en fixatietijd wijzigen.

5.1.1.1 Hoe selecteer ik **Fixatietijd** voor tracering in Tobii Dynavox Computer Control?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de Computer Control-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  Activering.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Tracering**.
7. Selecteer het keuzerondje voor de **Fixatietijd** voor een van de volgende waarden:
 - **Langzaam** (standaard)
 - Medium
 - Snel
8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar Computer Control-instellingen.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om Computer Control-instellingen af te sluiten.

5.1.1.2 Hoe wijzig/selecteer ik **Transparantie** voor tracering in Tobii Dynavox Computer Control?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de Computer Control-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  Activering.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Tracering**.
7. Selecteer het keuzerondje voor de **Transparantie** voor een van de volgende waarden:
 - **Licht** (standaard)
 - Medium
 - Donker
8. Selecteer de knop Vorige  om terug te gaan naar de Computer Control-instellingen.
9. Selecteer de knop Sluiten  om de Computer Control-instellingen af te sluiten.

5.1.2 Knoppen

Er zijn twee (2) radiaal menu's beschikbaar in de software: het Interaction Menu en het Off-Screen Menu en de dweltijd is de tijd die de gebruiker nodig heeft om de blik op de actie-items in deze menu's te richten om de geselecteerde actie te activeren.

5.1.2.1 Hoe wijzig/selecteer ik de **dwelltijd** voor de knoppen in Tobii Dynavox Computer Control?


1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.

3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de Computer Control-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  Activering.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Knoppen**.
7. Selecteer het keuzerondje voor de **Dwelltijd** voor een van de volgende waarden:
 - **Langzaam** (standaard)
 - Medium
 - Snel
8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar Computer Control-instellingen.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om Computer Control-instellingen af te sluiten.

5.2 Kalibratie

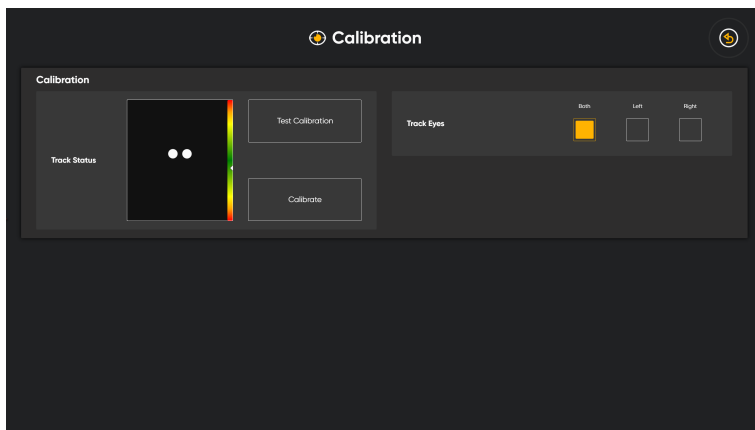


5.2.1 Hoe werkt het kalibratieproces in Tobii Dynavox Computer Control?

Het kalibratieproces werkt als volgt:


Wanneer een kalibratie wordt gestart, ongeacht of het een snelle kalibratie of normale kalibratie is, wordt de testkalibratie weergegeven. Op het testkalibratiescherm zijn er cirkels met een kleine stip in het midden. De oranje stip geeft aan waar de gebruiker naar kijkt. Door de blik op een van de punten te richten, kunt u zien waar de eyetracker de fixatie in die stip registreert en hoe klein of groot de afstand is.



Als de oranje cirkel zich binnen de gestippelde witte cirkel bevindt, is de kalibratie voldoende om Computer Control te gebruiken

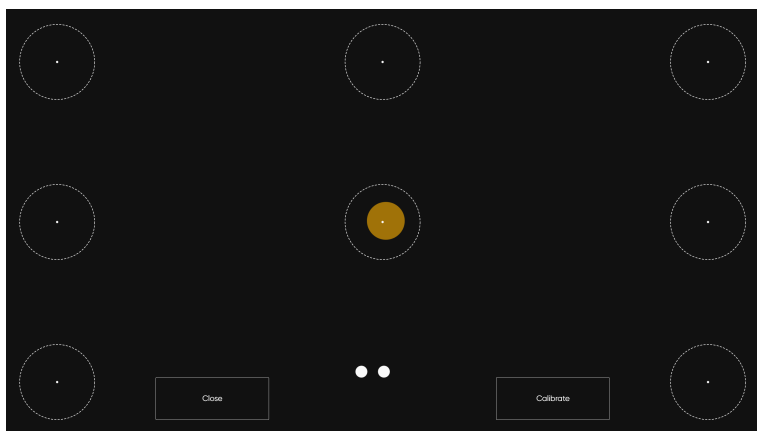

Wanneer de knop Kalibreren is geselecteerd, wordt het eerste kalibratiescherm weergegeven. Het is een zwart scherm en in het midden van het scherm is er een oranje stip met een zwart midden.



Er gebeurt niets totdat de gebruiker de blik op de stip richt, de eyetracker de fixatie registreert en de stip een keer knippert en verdwijnt.



Zolang de stip op het scherm blijft, heeft de eyetracker de blikgegevens voor die positie niet geregistreerd.

Er verschijnt een nieuw scherm. Het is een zwart scherm en in de vier hoeken ziet u een oranje stip met een zwart midden.



Er gebeurt niets totdat de gebruiker de blik op een van de stippen richt, de eyetracker de fixatie op die stip registreert en de stip een keer knippert en verdwijnt.



Zolang de stip op het scherm blijft, heeft de eyetracker de blikgegevens voor die positie niet geregistreerd.

Wanneer de gebruikers de blik op alle punten op het scherm hebben gericht en alle punten zijn verdwenen, is het kalibratieproces voltooid en wordt het testkalibratiescherm opnieuw weergegeven.

Test de kalibratie door naar de cirkels op het scherm te kijken. Sluit het testkalibratiescherm of start indien nodig een nieuwe kalibratie.

5.2.2 Hoe selecteer ik welk oog dat wordt gevolgd in Tobii Dynavox Computer Control?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de Computer Control-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  Kalibratie.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Kalibratie**.
7. Selecteer het keuzerondje voor **Ogen volgen** op een van de volgende manieren waarop de eyetracker de ogen van gebruikers kan volgen:
 - **Beide** (standaard)
 - Links
 - Rechts

8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar Computer Control-instellingen.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om Computer Control-instellingen af te sluiten.

5.2.3 Hoe controleer ik de positionering van de gebruiker met **Status volgen** in Tobii Dynavox Computer Control?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de Computer Control-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  Kalibratie.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Controleer de positie van de gebruiker door in het venster **Status volgen** te kijken.
Zie 3.4 *Venster Trackstatus* voor meer informatie
7. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar Computer Control-instellingen.

8. Selecteer de knop  (Sluiten) om Computer Control-instellingen af te sluiten.


5.2.4 Hoe kalibreer ik een gebruik in Tobii Dynavox Computer Control?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de Computer Control-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  Kalibratie.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Controleer de positie van de gebruiker door in het venster **Status volgen** te kijken.
Zie 3.4 Venster Trackstatus voor meer informatie
7. Selecteer de knop **Kalibreren**.
8. Kijk één voor één naar de oranje stippen die op het scherm worden weergegeven tot ze verdwijnen.
9. Probeer de nieuwe kalibratie uit.
10. Herhaal stap 7–9 tot u tevreden bent.
11. Selecteer de **Sluiten**-knop.

5.3 Toetsenbord

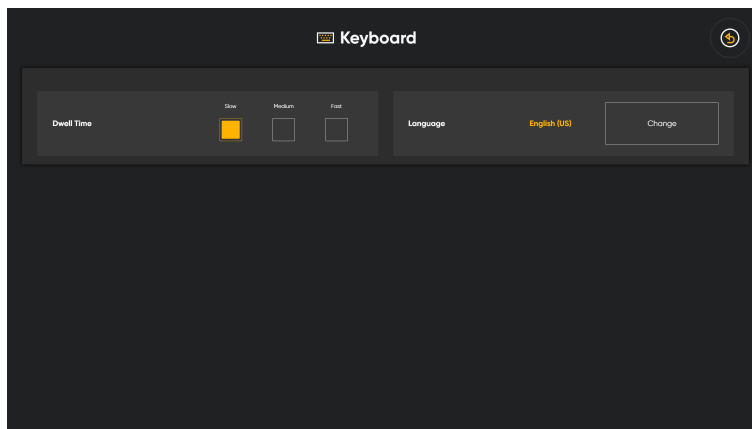

Taal

De geselecteerde taal voor toetsenbordindeling wordt getoond. Selecteer de knop **Wijzigen** om de toetsenbordindeling te wijzigen naar een andere taal. Er zijn een aantal verschillende talen voor toetsenbordindeling beschikbaar.

5.3.1 Hoe wijzig/selecteer ik de **dwelltijd** voor het toetsenbord in Tobii Dynavox Computer Control

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.

3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de Computer Control-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  (Toetsenbord).
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Dwelltijd**.
7. Selecteer het keuzerondje voor een van de volgende dwelltijden (ms):
 - **Langzaam** (standaard)
 - Medium
 - Snel

8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar Computer Control-instellingen.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om Computer Control-instellingen af te sluiten.

5.3.2 Hoe wijzig ik de **toetsenbordtaal** of stel ik deze in Tobii Dynavox Computer Control in?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de Computer Control-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  (Toetsenbord).
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Talen**
De actieve taal wordt weergegeven achter de kop Talen.
7. Selecteer de knop **Wijzigen**.
8. Zorg ervoor dat het keuzerondje **Geïnstalleerd** is geselecteerd?
9. Selecteer de gewenste taal.

10. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar Toetsenbordinstellingen.
11. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar Computer Control-instellingen.
12. Selecteer de knop  (Sluiten) om Computer Control-instellingen af te sluiten.

5.3.3 Hoe download ik nieuwe toetsenbordtalen in Tobii Dynavox Computer Control?


1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de Computer Control-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  (Toetsenbord).

5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Talen**
De actieve taal wordt weergegeven achter de kop Talen.
7. Selecteer de knop **Wijzigen**.
8. Selecteer het keuzerondje **Downloaden**.
9. Selecteer het pictogram  (Downloaden) voor de gewenste taal.
10. Selecteer de knop **Installeren** om de geselecteerde taal te downloaden.
11. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar Toetsenbordinstellingen.
12. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar Computer Control-instellingen.
13. Selecteer de knop  (Sluiten) om Computer Control-instellingen af te sluiten.

5.4 Algemeen

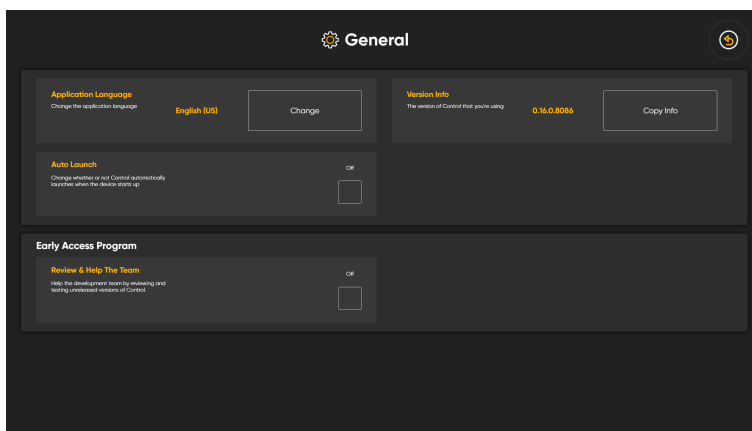

5.4.1 Hoe selecteer ik de **Applicatietaal** voor Tobii Dynavox Computer Control?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.
Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.
2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de Computer Control-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  (Algemeen).
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Applicatietaal**
De actieve taal wordt weergegeven achter de kop Talen.
7. Selecteer de knop **Wijzigen**.
8. Selecteer de gewenste taal.
9. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar **Algemene** instellingen.

10. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar Computer Control-instellingen.
11. Selecteer de knop  (Sluiten) om Computer Control-instellingen af te sluiten.

5.4.2 Hoe kopieer ik de **Versie-informatie** voor Tobii Dynavox Computer Control?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de Computer Control-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  (Algemeen).
5. Kijk in het gedeelte **Versie-informatie**.
6. Selecteer de knop **Kopieer informatie**.
7. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar Computer Control-instellingen.
8. Selecteer de knop  (Sluiten) om Computer Control-instellingen af te sluiten.

5.4.3 Hoe selecteer ik **Automatisch starten** Tobii Dynavox Computer Control?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de Computer Control-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  (Algemeen).
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Automatisch starten**.
7. Zet de schuifknop **Automatisch starten** op **Aan** om Computer Control automatisch te starten wanneer Windows® op het apparaat wordt gestart.
8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar Computer Control-instellingen.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om Computer Control-instellingen af te sluiten.

5.4.4 Hoe neem ik deel aan het Programma voor vroegtijdige toegang voor Tobii Dynavox Computer Control?

Met het Programma voor vroegtijdige toegang kan de gebruiker het ontwikkelingsteam van Tobii Dynavox helpen bij het beoordelen en testen van niet-uitgebrachte versies van Computer Control.

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de eyetracker of op het gebied van de eyetracker.

Het pictogram  (Off-Screen Menu) wordt zichtbaar in het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer het pictogram  (Off-Screen Menu) om Off-Screen Menu te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de Computer Control-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  (Algemeen).
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in de gedeeltes **Programma voor vroegtijdige toegang**.
7. Zet de schuifknop **Het team beoordelen en helpen** op **Aan** om deel te nemen aan het Programma voor vroegtijdige toegang.
8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar Computer Control-instellingen.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om Computer Control-instellingen af te sluiten.

Copyright ©Tobii AB (publ). Niet alle producten en diensten worden op elke lokale markt aangeboden. Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Alle handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren.

Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox-apparaat

Online help

Raadpleeg de productspecifieke supportpagina voor uw Tobii Dynavox-apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product. Onze supportpagina's vindt u online op: www.TobiiDynavox.com/support-training

Neem contact op met uw productadviseur of wederverkoper

Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox-productadviseur of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactinformatie naar www.TobiiDynavox.com/contact