

TD Control

Notandahandbók



Notandahandbók TD Control

Útgáfa 1.1

03/2022

Allur réttur áskilinn.

Copyright © Tobii AB (publ)

Ekki má afrita nokkurn hluta af þessu skjali, geyma það í endurheimtakerfi, eða senda í nokkru formi, með nokkrum leiðum (rafrænum, ljósritun, upptöku eða á annan hátt) án þess að vera með skriflegt leyfi frá útgefanda.

Höfundarréttarvernd nær yfir öll form og efni höfundarréttarvarinna efna og upplýsinga sem gildandi lög leyfa eða eiga eftir að leyfa, þ.m.t. án takmarka, efni sem kemur frá hugbúnaðinum sem sést á skjánum svo sem skjámyndir, valmyndir o.s.frv.

Upplýsingarnar í þessu skjali eru í eigu Tobii Dynavox. Hverskonar endurgerð að hluta eða í heilu lagi án fyrra skriflegs samþykkis Tobii Dynavox er óleyfileg.

Vörur sem er vísað til í þessu skjali geta verið annað hvort vörumerki og/eða skráð vörumerki viðkomandi eigenda.

Útgefandi og höfundur gera ekki tilkall til þessara vörumerkja.

Þó að allrar varfærni hafi verið gætt við undirbúning þessa skjals, taka útgefandi og höfundur enga ábyrgð á villum eða yfirsjónum, eða á tjóni sem verður til af notkun upplýsinga í þessu skjali eða af notkun forrita eða forritunarkóða sem gæti fylgt með því. Útgefandi og höfundur bera enga skaðabótaskyldu vegna tapaðs hagnaðar, eða nokkurs annars viðskiptalegs taps sem orsakast af eða er talið hafa orsakast beint eða óbeint af þessu skjali.

Efni getur breyst án fyrirvara.

Vinsamlegast athugaðu vefsíðu Tobii Dynavox

www.TobiiDynavox.com fyrir uppfærðar útgáfur af þessu skjali.

Tengiliðaupplýsingar:

Tobii Dynavox AB
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Sweden

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
Bretland

+46 8 663 69 90

Tobii Electronics Technology Suzhou Co. Ltd
Room 401, Building 6, No. 5 Xing Han Street Suzhou
P.R.China 215021

+86 512 69362880



Efnisyfirlit

1	Um TD Control	6
1.1	Ætluð notkun	6
1.2	Kerfiskröfur	6
2	Ræstu fyrst	7
3	Yfirlit yfir TD Control	9
3.1	Trace	9
3.2	Interaction Menu	10
3.3	Flettivalmyndir í TD Control	11
3.3.1	Flettivalmyndin	12
3.3.1.1	Stöðug stilling flettivalmyndar	12
3.3.2	Flettivalmynd lyklaborðsins	14
3.4	Dashboard	16
3.5	Rakningarstöðukassinn	18
3.6	Engin augnstýring tengd	18
4	Notkun TD Control	19
4.1	Aðgerðirnar í Interaction Menu	19
4.1.1	Hvernig framkvæmi ég aðgerð með TD Control?	19
4.1.2	Hvernig nota ég Skrúna í TD Control?	19
4.1.3	Hvernig framkvæmi ég hægri smell í TD Control?	20
4.1.4	Hvernig nota ég Smella og draga í TD Control?	21
4.1.5	Hvernig virkja ég lyklaborð í TD Control?	22
4.1.5.1	Lyklaborð	22
4.1.6	Hvernig nota ég Stilla markgildi í TD Control?	25
4.1.7	Hvernig nota ég tvísmella í TD Control?	25
4.1.8	Hvernig nota ég vinstri smell í TD Control?	25
4.2	Aðgerðir í flettivalmyndinni	26
4.2.1	Hvernig virkja ég Switcher í TD Control?	26
4.2.2	Hvernig virkja ég Stjórnborð í TD Control?	26
4.2.3	Gera hlé í TD Control	27
4.2.3.1	Hvernig geri ég hlé á augnstýringu í TD Control?	27
4.2.3.2	Hvernig get ég séð að ég hafi gert hlé á augnstýringu í TD Control?	28
4.2.3.3	Hvernig held ég augnstýringu áfram í TD Control	28
4.2.4	Stöðugar stillingar í TD Control	28
4.2.4.1	Hvernig framkvæmi ég stöðuga aðgerð í TD Control?	28
4.2.4.2	Hvernig breyti ég valinni stöðugri aðgerð í TD Control?	29
4.2.4.3	Hvernig hætti ég valinni stöðugri aðgerð í TD Control?	29
4.3	Aðgerðirnar á Dashboard	30
4.3.1	Hvernig virkja ég Dashboard í TD Control?	30
4.3.2	Hvernig virkja ég aðgerð úr Dashboard í TD Control?	31
4.3.3	Er til flýtleið til að framkvæma Kvöðrun í TD Control?	31
4.3.4	Hvernig set ég tækið mitt í biðstöðu með TD Control?	32
4.3.5	Hvernig fæ ég aðgang að Stillingum í TD Control?	32
4.3.6	Hvernig fæ ég aðgang að Minnisbók í TD Control?	33
5	TD Control Stillingar	34
5.1	Virkjun	34

5.1.1	Virkjunaraðferð:	35
5.1.1.1	Hvernig breyti ég virkjunaraðferð í TD Control	35
5.1.2	Hraði.....	35
5.1.2.1	Hvernig vel ég Tíma festingar fyrir rakninguna í TD Control	35
5.1.2.2	Hvernig breyti/stilli ég dvalartíma fyrir hnappana í TD Control?	36
5.1.3	Rekja	36
5.1.3.1	Hvernig breyti/stilli ég ógagnsæi fyrir rakninguna í TD Control?	36
5.1.4	Stilla markgildi	37
5.1.4.1	Hvernig get ég valið í hvora átt stilling markgildis mun virka í TD Control?	37
5.1.4.2	Hvernig vel ég hegðun þysgluggans fyrir Smella og draga í TD Control?	37
5.2	Kvörðun	38
5.2.1	Hvernig virkar kvörðunarferlið í TD Control?	38
5.2.2	Hvernig veit ég hvort augað er rakið í TD Control?	39
5.2.3	Hvernig athuga ég stöðu notandans með því að nota Rakningarstöðu í TD Control?	40
5.2.4	Hvernig kvarða ég notandann í TD Control?	40
5.2.5	Hvernig breyti ég skjásuppsetningunni fyrir augnstýringuna mína í TD Control?	41
5.3	Lyklaborð	42
5.3.1	Virkjunaraðferð:	42
5.3.1.1	Hvernig breyti ég virkjunaraðferð í TD Control?	42
5.3.2	Hnappar	42
5.3.2.1	Hvernig breyti/stilli ég dvalartíma fyrir Lyklaborð í TD Control?	42
5.3.2.2	Hvernig vel ég hegðun fyrir Aðlögunarhæfur dvalartími í TD Control?	43
5.3.3	Spá.....	43
5.3.3.1	Hvernig vel ég hegðun fyrir Spár í TD Control?	43
5.3.3.2	Hvernig breyti/stilli ég Spár dvalartíma í TD Control?	44
5.3.4	Almennt	44
5.3.4.1	Hvernig breyti/stilli ég tungumáli lyklaborðs í TD Control?	44
5.3.4.2	Hvernig hala ég niður nýju tungumáli fyrir lyklaborð í TD Control?	45
5.3.4.3	Hvernig vel ég hegðun fyrir Hljóðsvörun innsláttar í TD Control?	45
5.4	Stilling	46
5.4.1	Stöðug stilling	46
5.4.1.1	Hvernig stilli ég tegund Stöðugar stillingar sem notuð er í TD Control?	46
5.4.1.2	Hvernig geri ég stöðuga stillingu Ræsing virka/óvirka í TD Control?	46
5.5	Almennt	47
5.5.1	Hvernig vel ég Tungumál forrits fyrir TD Control?	47
5.5.2	Hvernig framkvæmi ég safna annálum fyrir TD Control?	48
5.5.3	Hvernig vel ég Sjálfvirka ræingu TD Control?	48
5.6	Sérstíða	49
5.6.1	Hvernig fjarlægi ég aðgerð úr gagnvirku valmyndinni í TD Control?	49
5.6.2	Hvernig bæti ég við aðgerð í gagnvirku valmyndina í TD Control?	49

5.7	Tæki	50
5.7.1	I-series aðlögunarhnappar	50
5.7.1.1	Hvernig stilli/breyti ég aðgerð fyrir þríhyrningshnappinn fyrir I-línuna í TD Control?	50
5.7.1.2	Hvernig stilli/breyti ég aðgerð fyrir ferhyrningshnappinn fyrir I-línuna í TD Control?	51
5.7.1.3	Hvernig geri ég hljóðstyrkshnappana virka/óvirka á I-línunni í TD Control?	51
5.8	Reikningurinn minn	52
5.8.1	Hvernig stofna ég reikning fyrir minn reikning í TD Control?	52
5.8.2	Hvernig skrái ég mig inn á reikninginn minn í TD Control?	52
6	Switcher	54
6.1	Hvernig fæ ég aðgang að Switcher í TD Control?	54
6.2	Hvernig skipti ég á forrit með Switcher	54
6.3	Hvernig bæti ég forriti við Switcher?	55
6.4	Hvernig fjarlægi ég forriti úr Switcher?	55

1 Um TD Control

1.1 Ætluð notkun

Tobii Dynavox augnstýring hefur hjálpað þúsundum einstaklinga með tjáskipta- og hreyfanleikaáskoranir að hafa bætt tjáskipti og lifa sjálfstæðara lífi. En hvað með alla þá sem vilja ná næsta áfanga og nýta allt sem tölvun þeirra hefur upp á að bjóða? TD Control er nýr gagnvirkur máti til að stýra tölvunni þinni með augnstýringu og býður upp á notendaupplifun með aukinni hugsýni sem veitir sjálfstæði. Augnstýringartækni hefur verið til í fjölda ára en það sem gerir að TD Control skarar framúr er að það veitir ekki einungis möguleika á að stjórna tölvu með augunum, heldur tekur það einnig til greina hugsýni og rökleiðslu þína í þeirri stjórnun. Þessi nýstárlega aðferð, sem kölluð er „Gagnvirkni fyrst“, auðveldar þér að nota tölvuna þína á þægilegan hátt og á eigin hraða, en leyfir þér einnig að nota uppáhalds hugbúnað þinn fyrir m.a. vafra, tölvupóst og tölvuleiki.

Gagnvirkni fyrst auðveldar notendum að velja hlut sem þau vilja nota gagnvirk áður en þau ákveða hvernig þau vilja nota hann. Þetta hefur í för með sér eðlilegri og gagnvirkari notkun og hjálpar við að fækka mistökum.

Fáðu fulla stjórn á tölvunni þinni með augunum þínum. Þú getur líkt eftir hverskonar músa-aðgerðum, renni-aðgerðum og slegið inn texta með hugbúnaðinum okkar. Við höfum einnig bætt við snjall-flýtleiðum til að gera það enn auðveldara að fá aðgang að öllum hlutum Windows!


1.2 Kerfiskröfur

Hlutar	Kröfur
Tölva og örgjörvi	i5-4200U @ 1.60 GHz (4G i5 tveggja kjarna / 4 þráða)
Minni (RAM)	8 gígabæti (GB) RAM (að lágmarki).
Harður diskur	500 megabæti (MB) tiltæk.
Stjórnkerfi	Windows 10
.NET útgáfa	4.7.2
Augnstýring	Tobii Dynavox I-línan I-13 & I-16 og Tobii Dynavox PCEye 5
Frekari kröfur	Mælt er með internettenginu til þess að fá uppfærslur.


2 Ræstu fyrst

Þegar TD Control er ræst í fyrsta skipti er notandinn leiddur um borð. Borðgangann felur í sér þrjú skref:

1. Lokkunarskjárin.
2. Velkomandasíðan.
3. Rakningarstöðusíðan (notuð til að sjá hvernig notandi er staðsettur fyrir framan augnstýringuna). (Frekari upplýsingar eru að finna á 3.5 *Rakningarstöðukassinn, síða 18*).
4. Kvörðunarsíðan (frekari upplýsingar eru að finna á 5.2 *Kvörðun*).
5. Þjónustuskilmálasíðan
6. Flýtleiðarvísissíðan

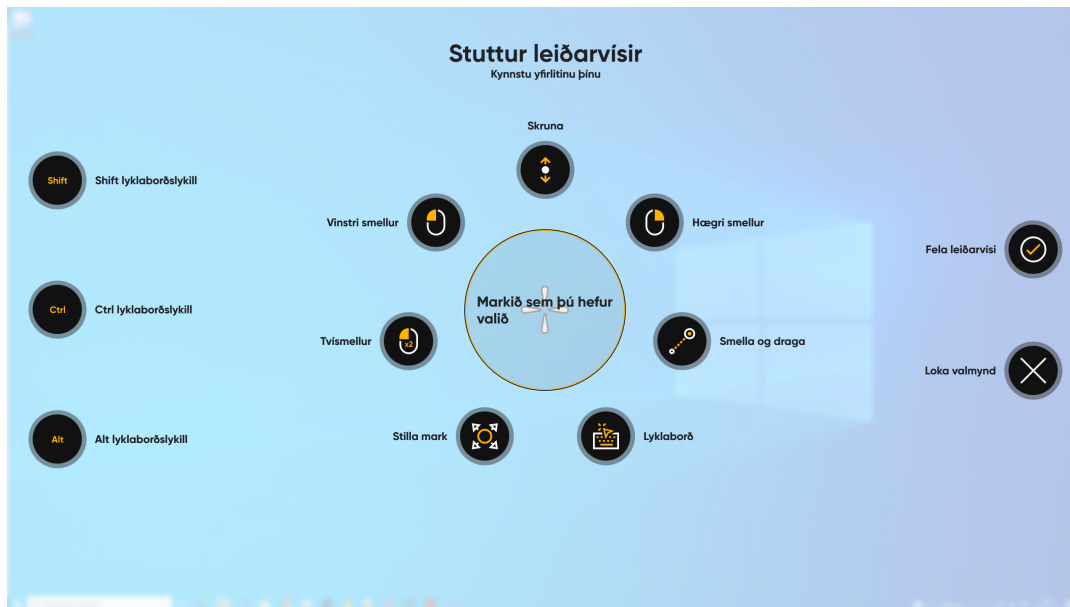


Þegar þú velur  (Fela leiðsögn) hnappinn í flýtleiðarvísinum munu birtast skilaboð á lægri hluta skjásins fyrir miðju með notendaupplýsingum um aðgang að Dashboard.

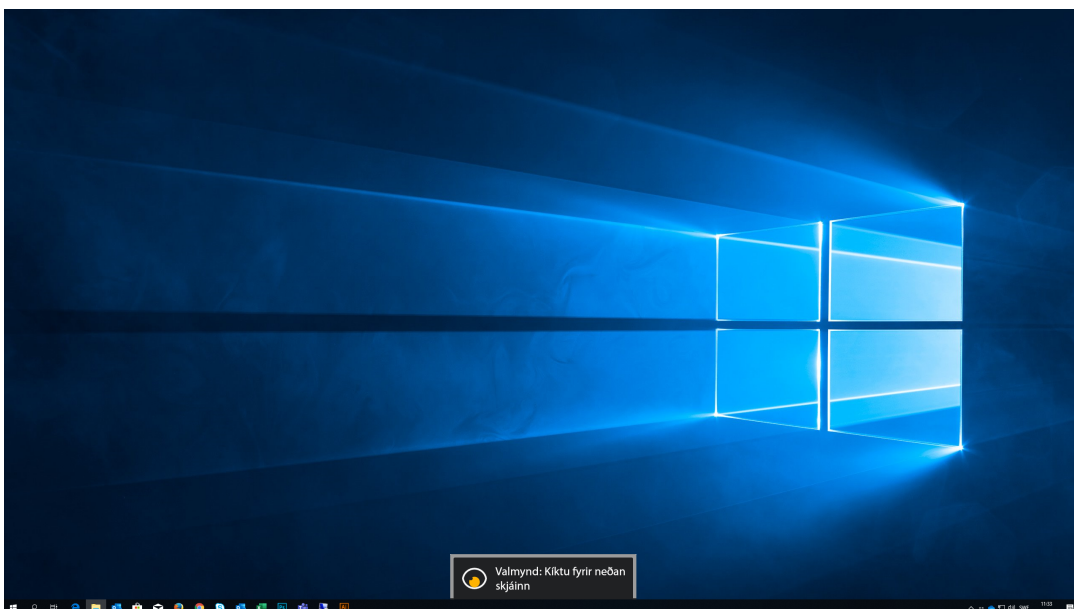

Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

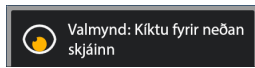

Sprettiglugginn sprettur upp þangað til notandinn velur




(Dashboard) táknmyndina.

Fyrsta skipti sem notandinn velur



(Dashboard) táknmyndina, birtist flýtleiðarvísinn fyrir Dashboard.

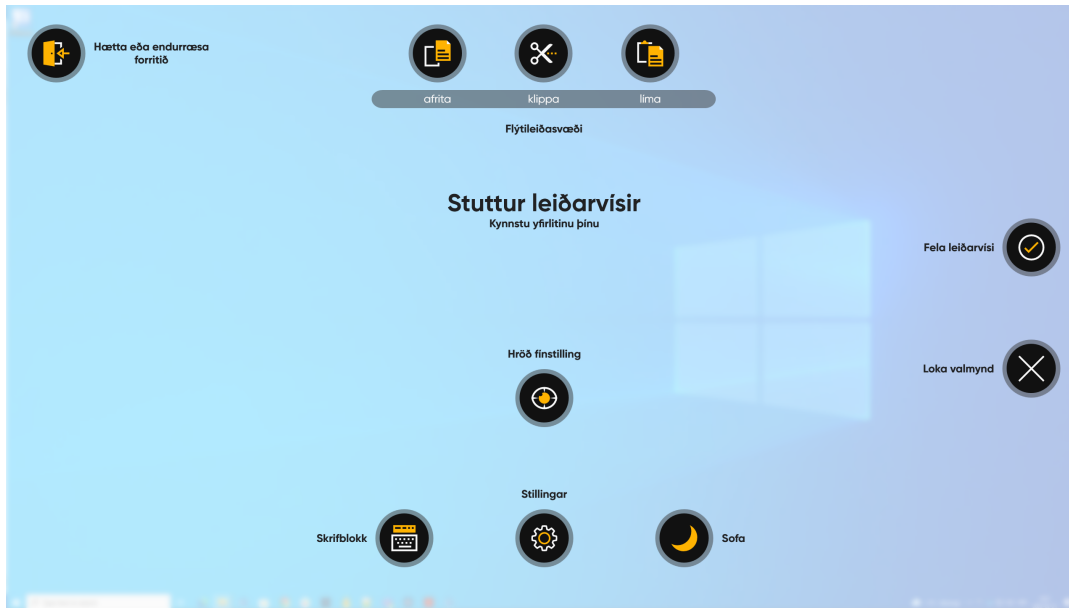

Veljið




(Fela leiðarvísir) hnappinn í flýtleiðarvísinum til þess að fara úr flýtleiðarvísinum.

3 Yfirlit yfir TD Control

3.1 Trace

Rakningin fylgir augnaráði notandans. Rakningin er meira óskýr þangað til notandinn festir augnaráðið, þá verður hún gegnheil og virknihvatin birtist. Virknihvatin beinist alltaf að miðju skjásins, þar sem Interaction Menu verður staðsettur. Flöturinn milli minni og stærri hringjanna læsist á þeirri stöðu skjásins sem rakningin er staðsett þegar notandinn festir augnaráðið, og mun sýna skyndimynd af fletinum inni í rakningunni í markfleti rakningarinnar. Þegar notandinn hættir mun rakningin sleppa skyndimyndinni og rakningin fer aftur í óvirka stöðu. Rakningin virkar á öllum gerðum bakgrunna.

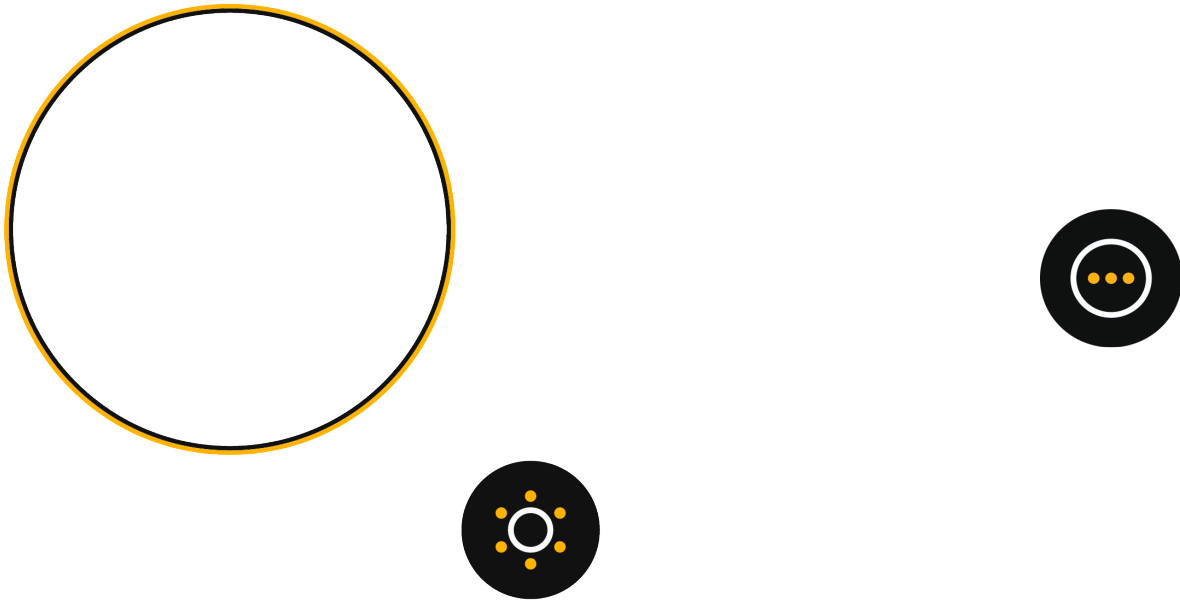


Skýringarmynd 3.1 Virk rakning

Tafla 3.1 Rakningin

Tákn	Aðgerð	Lýsing
	Rakningin	Rakningin er endurgjöf notandans um hvar augnaráð notandans er á skjánum. Rakningin mun færast til á skjánum þegar það fylgir augnaráði notandans. Þegar notandinn festir augnaráðið á skjánum í ákveðinn tíma mun virknihvatin birtast.
	Virknihvatin	Opnar Interaction Menu. Frekari upplýsingar eru að finna í 3.2 <i>Interaction Menu</i> , síða 10.
	Dashboard	Opnar Dashboard. Frekari upplýsingar eru að finna í 3.4 <i>Dashboard</i> , síða 16.

3.2 Interaction Menu

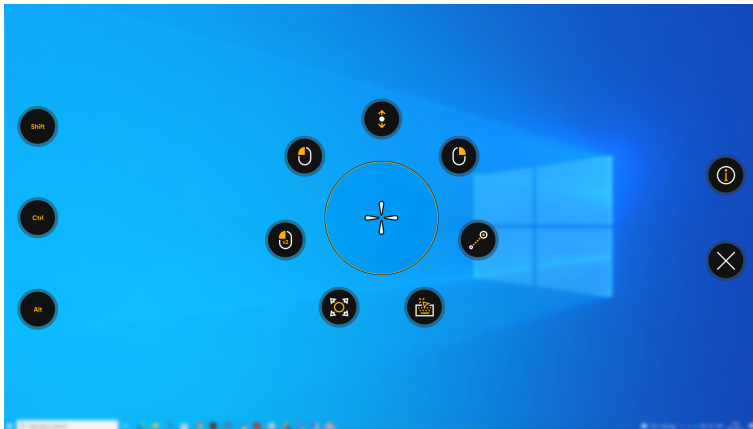

Stóri hringurinn, með þráðkrossinum fyrir miðju, í miðjum Interaction Menu, er að-þysjuð skyndimynd af markfletinum. Þráðkrossinn er hægt að finnstilla til að miða nákvæmlega að ákveðnum punkti innan markflatarins. Í *Tafla 3.2 Interaction Menu, síða 10*, eru allar tiltækar aðgerðir í Interaction Menu útskýrðar.

Tafla 3.2 Interaction Menu

Tákn	Aðgerð	Lýsing
	Skruna	Aðgerð sem, ef framkvæmd á skrunanlegum glugga, virkjar augnaráðs-stjórnaða leið til að skruna á síðunni. • Horfðu á skrunanlega flötinn og haltu augnaráðinu stöðugu. Interaction Menu mun opnast. • Veldu skrunaáðgerð. • Líttu upp fyrir skrunakkerið til að skruna upp. • Líttu niður fyrir skrunaakkerið til að skruna niður. • Líttu til vinstri við skrunaakkerið til að skruna til vinstri. • Líttu til hægri við skrunaakkerið til að skruna til hægri. • Líttu á Hætta hnappinn sem er staðsettur á hægri hönd til að hætta skrunaáðgerð.  Notaðu augnaráðsskrunaverkefnið (Gaze Scroll Task) til að skruna lóðrétt í Modern UI öppum og Modern UI upphafsskjá Windows.  Því lengra frá skrunakkerinu sem horft er, því hraðar skrunar það. Frekari upplýsingar eru að finna á <i>4.1.2 Hvernig nota ég Skruna í TD Control?, síða 19</i>.
	Hægri smelli	Aðgerð sem framkvæmir einn hægri smelli. Frekari upplýsingar eru að finna á <i>4.1.3 Hvernig framkvæmi ég hægri smelli í TD Control?, síða 20</i>.
	Smella og draga	Aðgerð til að færa hluti eða velja fleti. • Horfðu á hlutinn sem þú villt færa. • Veldu Smella og halda aðgerðina. • Horfðu á sleppistað hlutarins. • Veldu sleppitáknmyndina sem birtist á skjánum þegar þú heldur augnaráðinu þínu á sleppistaðnum. Frekari upplýsingar eru að finna á <i>4.1.4 Hvernig nota ég Smella og draga í TD Control?, síða 21</i>.

Tákn	Aðgerð	Lýsing
	Lyklaborð	Aðgerð opnar augnaráðsvirkjað lyklaborð á skjánum fyrir innslátt með augnaráði. Þessi aðgerð leggur einnig áherslu á flötinn sem notendur nota aðgerðina - sem þýðir að hún gerir vinstri smell og opnar síðan lyklaborðið. Frekari upplýsingar eru að finna í 4.1.5 <i>Hvernig virkja ég lyklaborð í TD Control?</i> , síða 22.
	Stilla markgildi	Aðgerð til að fínstilla markgildi gagnvirkni á skjánum. • Horfðu á staðinn sem þú villt nota aðgerð sem opnar Interaction Menu. • Horfðu á Stilla markgildi aðgerðina • Fínstilltu markflötinn með því að færa þráðkrossinn í markglugganum með augnaráði þínu og þannig staðsetja nákvæman punkt að þínu vali. • Veldu aðgerðina sem þú villt nota. Frekari upplýsingar eru að finna í 4.1.6 <i>Hvernig nota ég Stilla markgildi í TD Control?</i> , síða 25
	Tvísmellur	Aðgerð sem framkvæmir tvöfaldan vinstri smell. Frekari upplýsingar eru að finna í 4.1.7 <i>Hvernig nota ég tvísmella í TD Control?</i> , síða 25
	Vinstri smellur	Aðgerð sem framkvæmir einn vinstri smell, eða fyrir snertiskjái, pikkar einu sinni með fingri. Frekari upplýsingar eru að finna í 4.1.8 <i>Hvernig nota ég vinstri smell í TD Control?</i> , síða 25
	Hjálp	Aðgerð sem opnar hjálparsíðu.
	Hætta við	Aðgerð sem hættir við Interaction Menu.

Tafla 3.3 Breytingalyklar

Tákn	Aðgerð	Lýsing
	Shift-lykill	Aðgerð sem víxlar Shift lyklaborðslyklinum á milli Slökkt/Kveikt.
	Ctrl	Aðgerð sem víxlar Ctrl lyklaborðslyklinum á milli Slökkt/Kveikt.
	Alt	Aðgerð sem víxlar Alt lyklaborðslyklinum á milli Slökkt/Kveikt.

3.3 Flettivalmyndir í TD Control

Margvíslegar flettivalmyndir eru í boði á ólíkum stigum TD Control. Það sem þær eiga sameiginlegt er að allar flettivalmyndirnar eru byggðar á samhengi.

3.3.1 Flettivalmyndin

Ein flettivalmynd er í stjórnstöðinni, og hún er kölluð, og vísað er til hennar sem flettivalmyndin. Hinar flettivalmyndirnar bera eigin nöfn.



Tafla 3.4 Flettivalmyndin

Tákn	Aðgerð	Lýsing
	Skiptari	Aðgerð sem opnar Switcher. Frekari upplýsingar eru að finna í 6 <i>Switcher</i> , síða 54
	Dashboard	Aðgerð sem opnar Dashboard. Frekari upplýsingar eru að finna á 3.4 <i>Dashboard</i> , síða 16.
	Gera hlé	Aðgerð sem gerir hlé á gagnvirkni þangað til augnaráðshnappurinn Halda áfram er valinn.
	Stöðug stilling	Aðgerð sem opnar stöðuga stillingu flettivalmynda. Frekari upplýsingar eru að finna í 3.3.1.1 <i>Stöðug stilling flettivalmynda</i> , síða 12

3.3.1.1 Stöðug stilling flettivalmynda

Tvær (2) tegundir stöðugar stillingar eru í TD Control.

- Einfölduð
- Ítarleg

Frekari upplýsingar um stöðugar stillingar eru að finna í 5.4.1 *Stöðug stilling*, síða 46

3.3.1.1.1 Einfölduð stöðug stilling flettivalmyndar



Tafla 3.5 Einfölduð stöðug stilling flettivalmyndar

Tákn	Aðgerð	Lýsing
	Hjálp	Aðgerð sem opnar hjálparsíðu.
	Sýna rakningu	Aðgerð sem sýnir/felur rakninguna á skjánum.
	Vinstri smellur	Aðgerð sem framkvæmir einn vinstri smell með hverju föstu augnaráði. Frekari upplýsingar eru að finna með vinstri smelli í <i>Tafla 3.2 Interaction Menu, síða 10</i>
	Gera hlé	Aðgerð sem gerir hlé á gagnvirkni þangað til augnaráðshnappurinn Halda áfram er valinn. Frekari upplýsingar eru að finna á <i>4.2.3 Gera hlé í TD Control</i> .
	Hætta við	Aðgerð sem hættir stöðugri stillingu.

3.3.1.1.2 Flettivalmynd ítarlegrar stöðugar stillingar




Tafla 3.6 Flettivalmynd ítarlegrar stöðugar stillingar

Tákn	Aðgerð	Lýsing
	Hjálp	Aðgerð sem opnar hjálparsíðu.
	Stilla mark	Aðgerð sem framkvæmir eiginleikann stilling markgildis sjálfkrafa fyrir hvert val. Frekari upplýsingar eru að finna í 4.1.6 <i>Hvernig nota ég Stilla markgildi í TD Control?</i> , síða 25
	Vinstri smellur	Aðgerð sem framkvæmir einn vinstri smell með hverju föstu augnaráði. Frekari upplýsingar eru að finna í 4.1.8 <i>Hvernig nota ég vinstri smell í TD Control?</i> , síða 25.
	Smella og halda	Aðgerð sem framkvæmir Smella og halda eiginleikann með hverju vali. Frekari upplýsingar eru að finna í 4.1.4 <i>Hvernig nota ég Smella og draga í TD Control?</i> , síða 21.
	Halda niðri og draga	Aðgerð sem framkvæmir Halda niðri og draga með hverju vali þangað til notandinn velur að hætta að nota það. Sérstaklega gagnlegt fyrir teikningar í hugbúnaði eins og Photoshop eða Paint. • Horfðu á þann flöt á skjánum sem þú villt að byrjunarpunktur fyrir Halda niðri og draga eigi að vera. • Gerðu eiginleikann virkan. • Færðu augnaráðið að staðsetningunni á skjánum. Augnaráðið verður rakið. • Horfðu á sleppistað hlutarins. • Veldu slepptáknmyndina sem birtist á skjánum þegar þú heldur augnaráðinu þínu á sleppistaðnum.
	Hætta við	Aðgerð sem hættir stöðugri stillingu.

3.3.2 Flettivalmynd lyklaborðsins

Flettivalmynd lyklaborðsins birtist á skjánum þegar aðgerðir lyklaborðsins eða minnisbókarinnar sjást á skjánum.

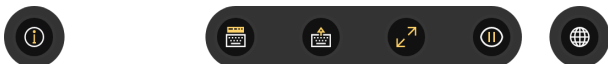


Skýringarmynd 3.2 Dashboard.

Tafla 3.7 Flettivalmynd lyklaborðsins

Tákn	Aðgerð	Lýsing
	Hjálp	Aðgerð sem opnar hjálparsíðu .
	Skrifblokk	Aðgerð sem opnar minnisbók areiginleikann. Frekari upplýsingar eru að finna í 4.3.6 <i>Hvernig fæ ég aðgang að Minnisbók í TD Control?</i> .
	Fela minnisbók	Aðgerð sem felur minnisbókina . Ólíkar táknmyndir birtast eftir því hvort minnisbókin hefur opnast að ofan eða fyrir neðan lyklaborðið.
		
	Færa lyklaborð	Aðgerð sem færir lyklaborðið efst eða neðst á skjáinn eftir því hvar það hefur opnast.
		
	Breyta stærð	Aðgerð sem breytir stærð lyklaborðsins.
	Gera hlé	Aðgerð sem gerir hlé á gagnvirkni þangað til augnaráðshnappurinn Halda áfram er valinn. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.2.3 <i>Gera hlé í TD Control</i> .
	Flýtleið tungumál	Aðgerð sem opnar tungumálasíðuna til að breyta tungumáli lyklaborðs á fljótlegan hátt.
	Hætta við	Aðgerð sem hættir við Dashboard.

3.4 Dashboard

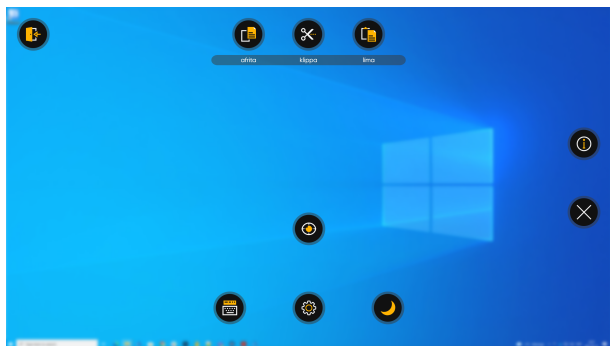

Skýringarmynd 3.3 Dashboard.

Tafla 3.8 Dashboard

Tákn	Aðgerð	Lýsing
	Stillingar	Aðgerð sem opnar TD Control stillingar. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 5 <i>TD Control Stillingar</i> .
	Minnisbók	Aðgerð sem opnar minnisbókareiginleikann. Frekari upplýsingar eru að finna í 4.3.6 <i>Hvernig fæ ég aðgang að Minnisbók í TD Control?</i> .
	Hröð kvörðun	Aðgerð sem opnar hraða kvörðun. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.3.3 <i>Er til flýtleið til að framkvæma Kvörðun í TD Control?</i> .
	Biðstaða	Aðgerð sem setur tækið í biðstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.3.4 <i>Hvernig set ég tækið mitt í biðstöðu með TD Control?</i> , síða 32.
	Hjálp	Aðgerð sem opnar hjálparsíðu.


Tákn	Aðgerð	Lýsing
	Hætta TD Control	Aðgerð sem lokar og hættir TD Control hugbúnaðinum.
	Hætta við	Aðgerð sem hættir við Dashboard.



Tafla 3.9 Flýtleiðasvæði

Tákn	Aðgerð	Lýsing
	afrita	Aðgerð sem afritar valinn hlut/texta.
	líma	Aðgerð sem límir valinn hlut/texta.
	klippa	Aðgerð sem klippir valinn hlut/texta.

3.5 Rakningarstöðukassinn

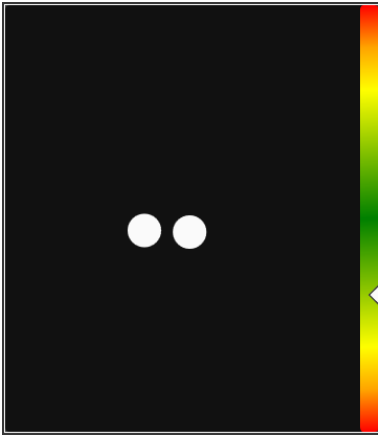

Skýringarmynd 3.4 Rakningarstöðukassinn

Staða rakningar eiginleikinn er notaður til að athuga hvort að notandi sé rétt staðsettur fyrir framan augnstýringuna.

- Hvítu punktarnir tveir (2) — Augu notandans og hvernig þau eru staðsett í átt að skjánum. Fyrir ákjósanlegustu stöðu, ættu hvítu punktarnir að vera í miðju svarta svæðinu.
- Litríka sláin vinstra megin við hvítu örina — hversu langt frá eða nálægt notandinn er staðsettur frá skjánum.
 - Ef hvíta örin er í miðju græna svæðinu á slánni, er notandinn í kjörfjarlægð frá skjánum.
 - Ef örin er á lægri hluta slárinnar — skaltu færa notandann nær augnstýringunni.
 - Ef örin er á hærri hluta slárinnar — skaltu færa notandann fjær augnstýringunni.

3.6 Engin augnstýring tengd

Ef engin augnstýring er tengd tækinu eða ef einhver aftengir augnstýringuna munu eftirfarandi upplýsingar birtast:



Engin augnstýring tengd

Þegar augnstýring er tengd/endurtengd munu skilaboðin hverfa sjálfkrafa.

4 Notkun TD Control

TD Control gerir það mögulegt fyrir notandann að stjórna venjulegu Windows stýrikerfi með tveggja með tveggja skrefa valaðferð sem dregur úr hættu á óumbeðnum smellum.



Allir eiginleikar/aðgerðir í TD Control eru snerti- og músar-virkjaðir sem gerir umönnunaraðila eða aðstoðarmanni auðveldara um vik að aðstoða ef þess þarf. Umönnunaraðilinn eða aðstoðarmaðurinn getur valið aðgerð eða breytt stillingum fyrir notandann á auðveldari hátt.


Aðgangur að Interaction Menu eiginleikanum er ekki tiltækur án augnstýringar.

4.1 Aðgerðirnar í Interaction Menu

4.1.1 Hvernig framkvæmi ég aðgerð með TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á óskaðan flöt skjásins (eða á tákn á skjánum) þar sem þú vilt framkvæma aðgerðina.

2. Veldu  (Virknihvati) tákn. Interaction Menu mun opnast.

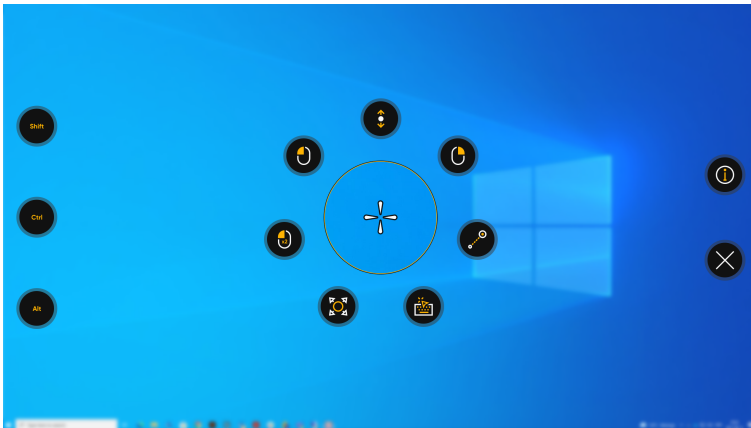

3. Þráðkrossinn fyrir miðju markgluggans sýnir hvar aðgerðin verður framkvæmd. Ef þörf krefur, fínstilltu virkjunarpunktinn með því að fylgja þessum skrefum.

- a. Veldu  (stilla markgildi) táknmyndina.
 - b. Færðu rakninguna í markglugganum með augnaráði þínu þar til þú staðsetur nákvæman valinn punkt. Þráðkrossinn færir á nýju stöðuna.
 - c. Endurtaktu þar til þú færð ákjósanlegt markgildi inni í þráðkrossinum.
4. Veldu þá aðgerð sem á að framkvæma með Interaction Menu eða veldu (loka) hnappinn til að hætta við.

4.1.2 Hvernig nota ég **Skruna** í TD Control?



1. Festu augnaráð þitt á óskaðan flöt skjásins (eða á tákn á skjánum) þar sem þú vilt framkvæma aðgerðina.

2. Veldu  (Virknihvati) tákn.

Interaction Menu mun opnast.

3. Þráðkrossinn fyrir miðju markgluggans sýnir hvar aðgerðin verður framkvæmd. Ef þörf krefur, fínstilltu virkjunarpunktinn með því að fylgja þessum skrefum.
 - a. Veldu  (stilla markgildi) táknmyndina.
 - b. Færðu rakninguna í markglugganum með augnaráði þínu þar til þú staðsetur nákvæman valinn punkt. Þráðkrossinn færir á nýju stöðuna.
 - c. Endurtaktu þar til þú færð ákjósanlegt markgildi inni í þráðkrossinum.
4. Veldu  táknmyndina úr Interaction Menu. Skrunakkerið mun verða staðsett á skjánum þar sem þráðkrossinn var staðsettur.
5. Veldu í hvaða átt þú vilt skruna:
 - Líttu upp fyrir skrunakkerið til að skruna upp.
 - Líttu niður fyrir skrunakkerið til að skruna niður.
 - Líttu til vinstri við skrunakkerið til að skruna til vinstri.
 - Líttu til hægri við skrunakkerið til að skruna til hægri.
 - Horfðu á svæðið í kringum skrunakkerið til að gera hlé á að skruna.

 Því lengra frá skrunakkerinu sem horft er, því hraðar skrunar það.

 Íhugaðu að staðsetja skrunakkerið nálægt miðju skrunanlega svæðisins til að fá sem mestan sveigjanleika.
6. Veldu  (loka) hnappinn til að hætta að skruna.

4.1.3 Hvernig framkvæmi ég hægri smell í TD Control?




1. Festu augnaráð þitt á óskaðan flöt skjásins (eða á tákn á skjánum) þar sem þú vilt framkvæma aðgerðina.
2. Veldu  (Virknihvati) tákn. Interaction Menu mun opnast.
3. Þráðkrossinn fyrir miðju markgluggans sýnir hvar aðgerðin verður framkvæmd. Ef þörf krefur, fínstilltu virkjunarpunktinn með því að fylgja þessum skrefum.
 - a. Veldu  (stilla markgildi) táknmyndina.
 - b. Færðu rakninguna í markglugganum með augnaráði þínu þar til þú staðsetur nákvæman valinn punkt. Þráðkrossinn færir á nýju stöðuna.
 - c. Endurtaktu þar til þú færð ákjósanlegt markgildi inni í þráðkrossinum.
4. Veldu  táknmyndina úr Interaction Menu.


4.1.4 Hvernig nota ég **Smella og draga** í TD Control?



1. Festu augnaráð þitt á óskaðan flöt skjásins (eða á tákn á skjánum) þar sem þú vilt framkvæma aðgerðina.
2. Veldu  (Virknihvati) tákn. Interaction Menu mun opnast.
3. Þráðkrossinn fyrir miðju markgluggans sýnir hvar aðgerðin verður framkvæmd. Ef þörf krefur, fínstilltu virkjunarpunktinn með því að fylgja þessum skrefum.
 - a. Veldu  (stilla markgildi) táknmyndina.
 - b. Færðu rakninguna í markglugganum með augnaráði þínu þar til þú staðsetur nákvæman valinn punkt. Þráðkrossinn færir á nýju stöðuna.
 - c. Endurtaktu þar til þú færð ákjósanlegt markgildi inni í þráðkrossinum.
4. Veldu  táknmyndina úr Interaction Menu.
5. Veldu nýja staðsetningu hlutarins. Lína birtist á milli gömlu og nýju staðsetningar rakningarinnar.

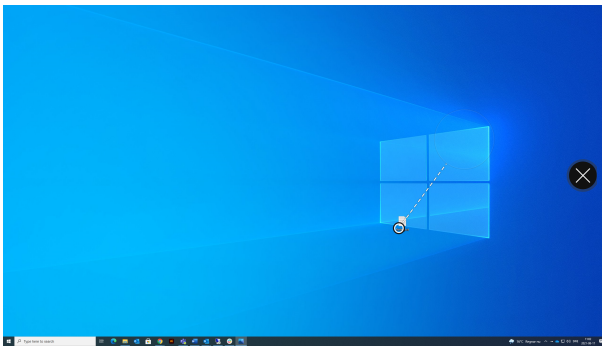


6. Festu augnaráðið á nýju staðsetninguna. Sleppa tákninu birtist á skjánum fyrir utan rakninguna.

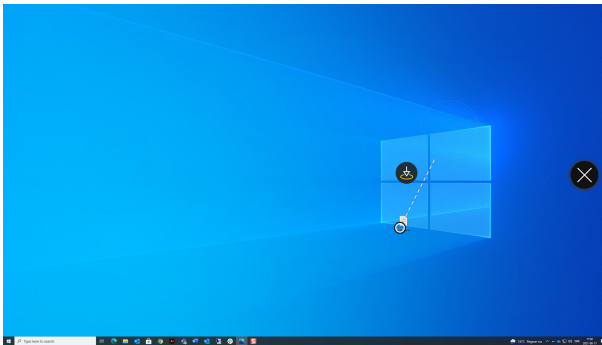

7. Veldu  (Sleppa) aðgerðina til að sleppa hlutnum á nýju staðsetningunni.

Aðgerðin Stilla markgildi birtist.

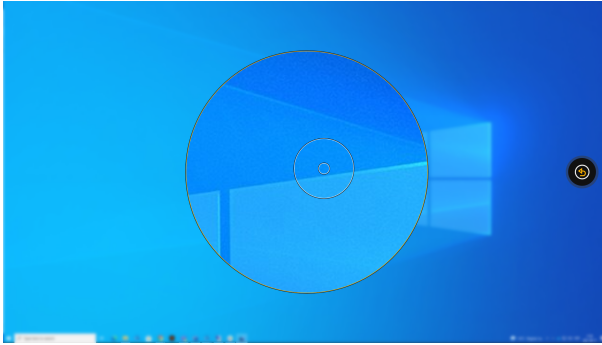

8. Veldu nákvæman punkt fyrir nýju staðsetninguna.
9. Hluturinn er nú á nýju staðsetningunni.

4.1.5 Hvernig virkja ég lyklaborð í TD Control?

Lyklaborðið er notað til að slá inn texta í skjal, slá inn texta í leitarreit, velja Endurnefna í valmynd til að endurnefna skjal.



1. Festu augnaráð þitt á óskaðan flöt skjásins (eða á tákn á skjánum) þar sem þú vilt framkvæma aðgerðina.
2. Veldu  (Virknihvati) táknið.
Interaction Menu mun opnast.
3. Þráðkrossinn fyrir miðju markgluggans sýnir hvar aðgerðin verður framkvæmd.
Ef þörf krefur, fínstilltu virkjunarpunktinn með því að fylgja þessum skrefum.
 - a. Veldu  (stilla markgildi) táknmyndina.
 - b. Færðu rakninguna í markglugganum með augnaráði þínu þar til þú staðsetur nákvæman valinn punkt. Þráðkrossinn færir á nýju stöðuna.
 - c. Endurtaktu þar til þú færð ákjósanlegt markgildi inni í þráðkrossinum.
4. Veldu  táknmyndina úr Interaction Menu.
5. Ef þörf krefur, notaðu  (Færa lyklaborð upp) eða  (Færa lyklaborð neðst) hnappana til að færa lyklaborðið.

4.1.5.1 Lyklaborð

Með því að velja  eiginleika lyklaborðs úr Interaction Menu, ræsist lyklaborðið sem lyklaborð á skjánum. Lyklaborðið opnast ætíð á gagnstæðum hluta skjásins miðað við þar sem ganvirknin var. Hægt er að færa lyklaborðið með því að nota


 (Færa lyklaborð upp) eða  (Færa lyklaborð neðst) hnappana sem eru tiltækir þegar lyklaborðið er virkt á skjánum.

Háð tungumáli samanstendur lyklaborðið af fjórum-fimm (4-5) lyklaborðssíðum. Notandinn getur auðveldlega skipt á milli lyklaborðssíða með því að velja einn af hnöppunum ,  eða  sem staðsettir eru í efra hægra horni lyklaborðsins eða  sem er staðsett í efra vinstra horni síðnanna fyrir tölur og sértákn.


Lykillinn á lyklaborðinu þar sem notandinn horfir verður gefinn til kynna með ljósum ramma utan um táknið/virknina .

á lyklinum, og þegar lykillinn er valinn breytir hann snögglega um lit í stilltan virkjunarlit .


Lyklaborðssíðurnar eru:

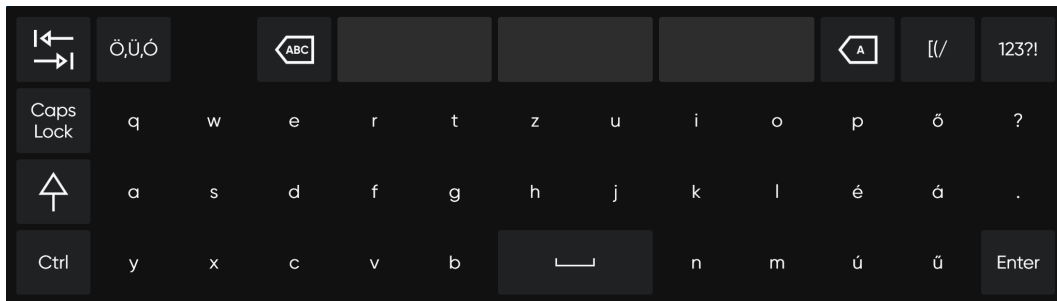


Skýringarmynd 4.1 Lyklaborðssíðan

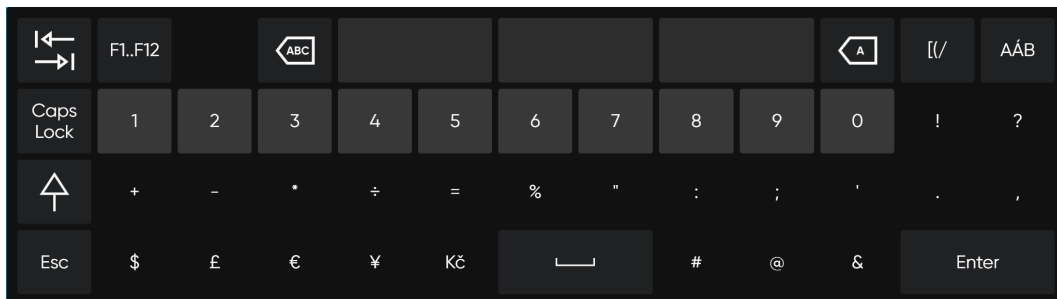


Skýringarmynd 4.2 Tölusíðan

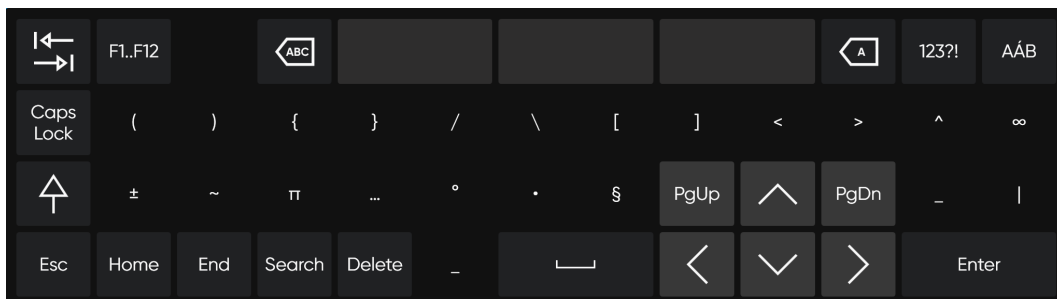

Skýringarmynd 4.3 Sértáknasíðan

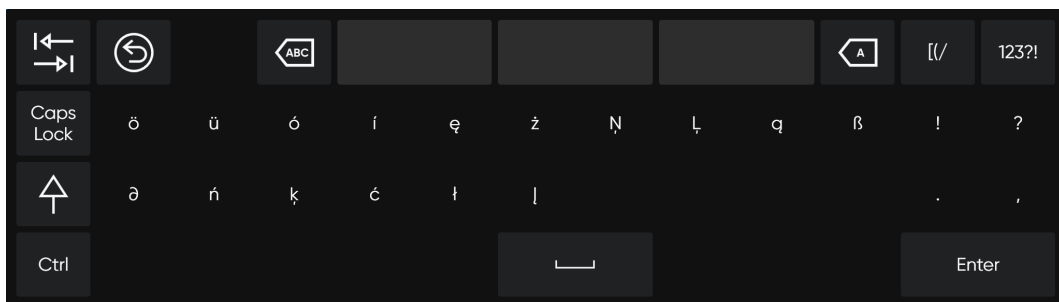

Skýringarmynd 4.4 Sérstaka tungumála

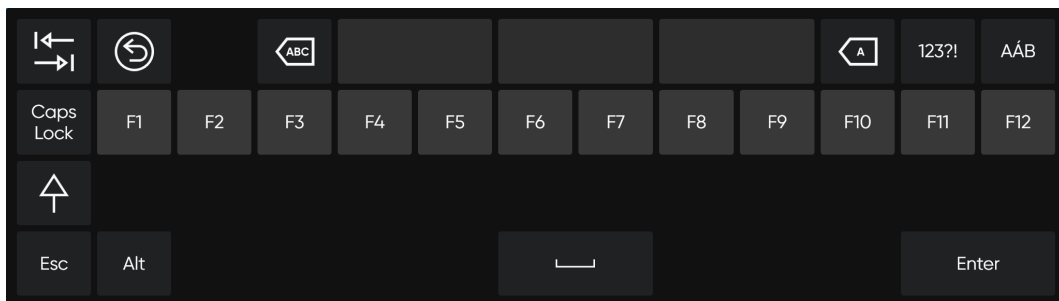


Skýringarmynd 4.5 Aðgerðahnappasíðan

Til að breyta tungumáli lyklaborðs og öðrum stillingum fyrir lyklaborðið, sjá 5 *TD Control Stillingar*, síða 34.

4.1.5.1.1 Orðaspá

Orðaspárvélin sem notuð er í TD Control er frá SwiftKey™ og er oft notuð í spjaldtölvum og snjallsímum. SwiftKey™ notar blöndu af gervigreindartækni sem gerir henni kleift að spá fyrir um næsta orð sem notandi ætlar að slá inn. SwiftKey™ lærir frá fyrri texta sem notandi hefur skrifað og úttaksspám sem byggðar eru á núverandi innslegnum texta og því sem hún hefur lært. Orðaspártungumálið mun breytast eftir tungumálalyklaborðs stillingum.

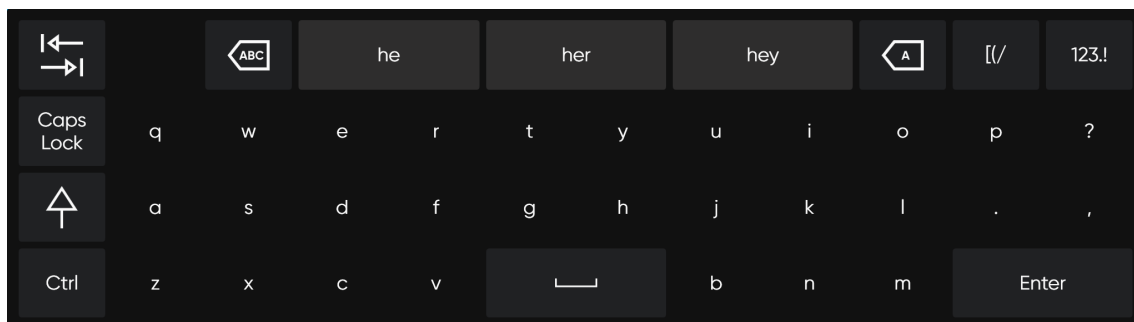

Skýringarmynd 4.6 Lyklaborð með orðaspá virkjaða

Þegar orðaspáin er notuð birtast þrír (3) kassar fyrir ofan lyklaborðið. Kassinn lengst til vinstri sýnir líklegasta fyrirspáða orðið og hinir tveir (2) kassarnir innihalda eitt fyrirspáð orð hver. Til að velja fyrirspáð orð, skaltu velja kassann með rétta orðinu í. Ef þú finnur ekki orðið sem þú leitar að, skaltu halda áfram að slá inn og vonandi kemur orðið sem þú leitar að eftir næsta staf.



Ef þú notar orðaspá og vilt slá inn orð sem er með áherslumerki, eins og hús, er oft auðveldara að láta orðaspánna sjá um áherslumerkið. Settu einfaldlega inn „hus“ og þú færð uppástungu fyrir „hús“.

4.1.6 Hvernig nota ég **Stilla markgildi** í TD Control?



Aðgerðin Stilla markgildi er notuð til að fínstilla virkjunarpunkt inni í markglugganum. Þráðkrossinn fyrir miðju markgluggans sýnir hvar aðgerðin verður framkvæmd.

Fínstilltu virkjunarpunktinn með því að fylgja eftirfarandi skrefum.

1. Veldu  (stilla markgildi) táknmyndina.
2. Færðu rakninguna í markglugganum með augnaráði þínu þar til þú staðsetur nákvæman valinn punkt. Þráðkrossinn færir á nýju stöðuna.
3. Endurtaktu þar til þú færð ákjósanlegt markgildi inni í þráðkrossinum.

4.1.7 Hvernig nota ég **tvísmella** í TD Control?



1. Festu augnaráð þitt á óskaðan flöt skjásins (eða á tákn á skjánum) þar sem þú vilt framkvæma aðgerðina.
2. Veldu  (Virknihvati) táknið. Interaction Menu mun opnast.
3. Þráðkrossinn fyrir miðju markgluggans sýnir hvar aðgerðin verður framkvæmd. Ef þörf krefur, fínstilltu virkjunarpunktinn með því að fylgja þessum skrefum.
 - a. Veldu  (stilla markgildi) táknmyndina.
 - b. Færðu rakninguna í markglugganum með augnaráði þínu þar til þú staðsetur nákvæman valinn punkt. Þráðkrossinn færir á nýju stöðuna.
 - c. Endurtaktu þar til þú færð ákjósanlegt markgildi inni í þráðkrossinum.
4. Veldu  táknmyndina úr Interaction Menu.

4.1.8 Hvernig nota ég **vinstri smell** í TD Control?



1. Festu augnaráð þitt á óskaðan flöt skjásins (eða á tákn á skjánum) þar sem þú vilt framkvæma aðgerðina.
2. Veldu  (Virknihvati) táknið. Interaction Menu mun opnast.
3. Þráðkrossinn fyrir miðju markgluggans sýnir hvar aðgerðin verður framkvæmd. Ef þörf krefur, fínstilltu virkjunarpunktinn með því að fylgja þessum skrefum.

- a. Veldu  (stilla markgildi) táknmyndina.
 - b. Færðu rakninguna í markglugganum með augnaráði þínu þar til þú staðsetur nákvæman valinn punkt. Þráðkrossinn færir á nýju stöðuna.
 - c. Endurtaktu þar til þú færð ákjósanlegt markgildi inni í þráðkrossinum.
4. Veldu  táknmyndina úr Interaction Menu.


4.2 Aðgerðir í flettivalmyndinni



4.2.1 Hvernig virkja ég **Switcher** í TD Control?

Með Switcher getur notandinn skipt á milli virks hugbúnaðar og Tobii Dynavox forrita.

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu  (Switcher) aðgerðina. Switcher opnast.

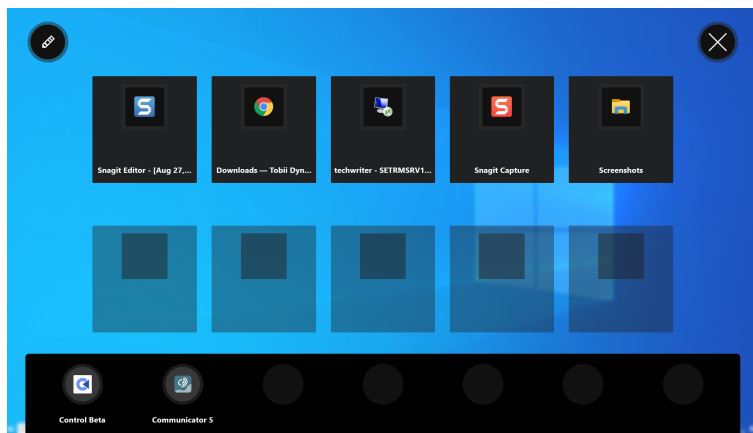

Frekari upplýsingar um samstillingu eru að finna í *6 Switcher, síða 54*.


4.2.2 Hvernig virkja ég **Stjórnborð** í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.



2. Veldu  (Dashboard) tákn.

Stjórnborðið opnast.

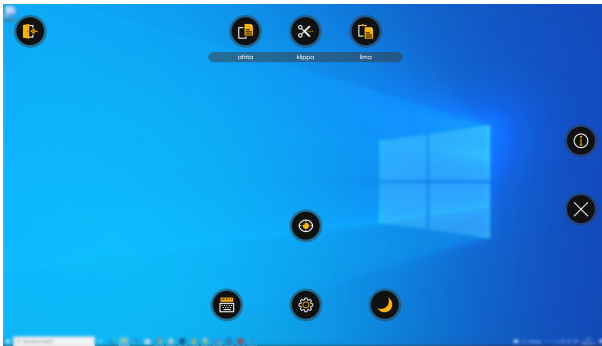

Skýringarmynd 4.7 Dashboard.

Fyrir frekari upplýsingar, sjá 4.3 *Aðgerðirnar á Dashboard*, síða 30.

4.2.3 Gera hlé í TD Control

Notkun augnaráðs er líkamlegt verk sem endurtekur sig og reynir á vöðvana í kringum augun sem geta sýnt þreytumerki. Að gera hlé á beitingu augnaráðs gefur þér ekki bara tíma til að skoða það sem er á skjánum án virkrar gagnvirkni, heldur gefur augunum eignig hvíld.


4.2.3.1 Hvernig geri ég hlé á augnstýringu í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.


3. Veldu  (Gera hlé) aðgerðina.

 appelsínugul táknmynd fyrir hlé sést stuttlega á skjánum, og það kantar skjásins verða appelsínugulir sem vísar til þess að gert hafi verið hlé á TD Control.

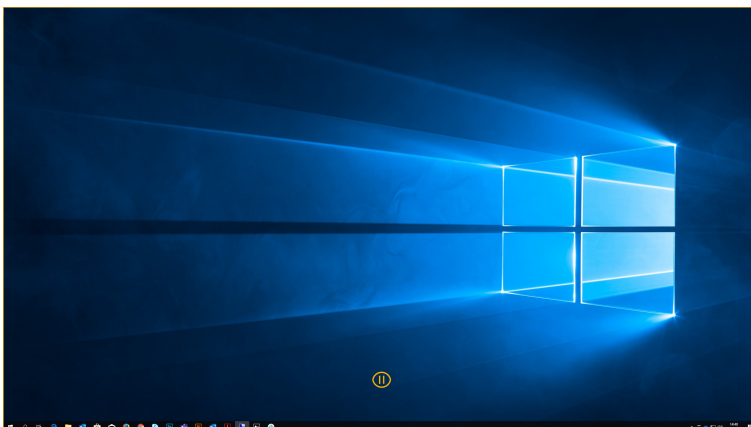

4.2.3.2 Hvernig get ég séð að ég hafi gert hlé á augnstýringu í TD Control?

Ystu kantar skjásins verða appelsínugulir.

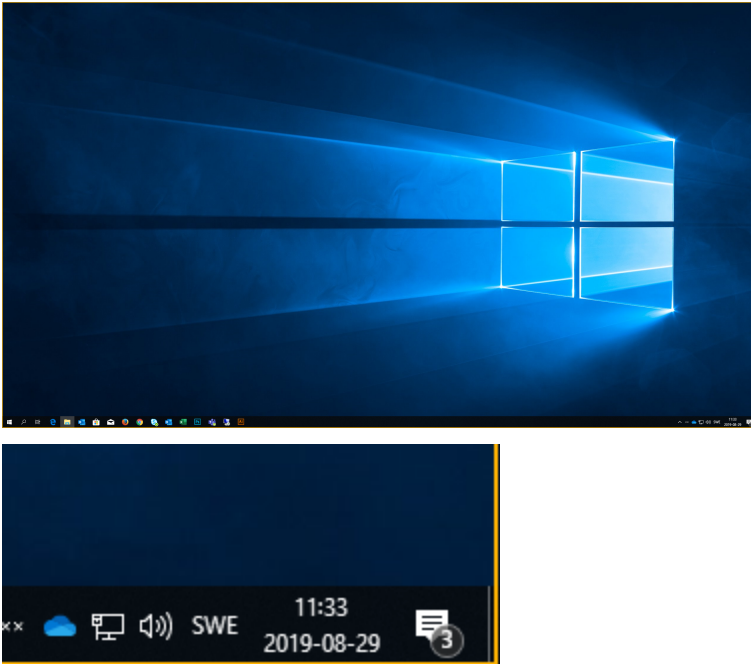

4.2.3.3 Hvernig held ég augnstýringu áfram í TD Control

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.



(Halda augnaráði áfram) táknmyndin birtist á lægri hluta skjásins.

2. Veldu  (Halda augnaráði áfram) táknmyndina til að halda augnaráði áfram í TD Control.

4.2.4 Stöðugar stillingar í TD Control

Tvær (2) tegundir stöðugra aðgerða eru í TD Control:

- Ítarlegar stöðugar aðgerðir
- Einfaldaðar stöðugar aðgerðir

Frekari upplýsingar um mismunandi stillingar eru að finna í 3.3.1.1 *Stöðug stilling flettivalmyndar*, síða 12


4.2.4.1 Hvernig framkvæmi ég stöðuga aðgerð í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.



2. Veldu  (Stöðugur smellur) aðgerðina.

Flettivalmyndin fyrir stöðugar stillingar birtist.

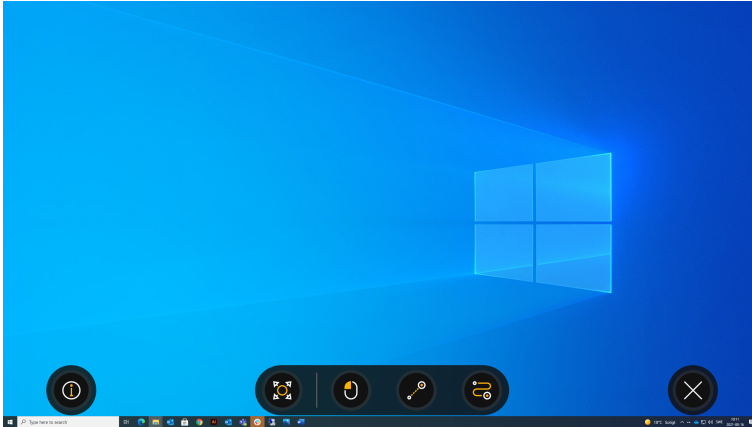

3. Veldu eina tiltæka stöðuga aðgerð.
4. Festu augnaráð þitt á óskaðan flöt skjásins (eða á tákn á skjánum) þar sem þú vilt framkvæma aðgerðina.




Valin stöðug aðgerð mun vera virk þar til notandinn breytir því virkt eða hættir aðgerðinni.



Hægt er að stilla TD Control svo að það opnast í einum þessum stillingum ef þess er óskað.

4.2.4.2 Hvernig breyti ég valinni stöðugri aðgerð í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin fyrir stöðugar stillingar birtist.

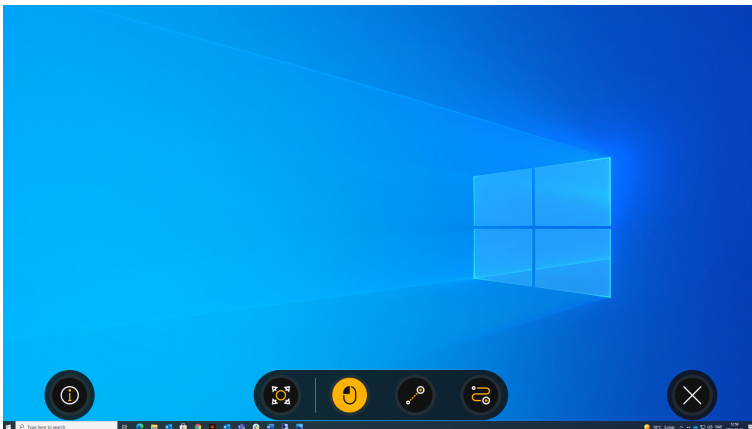


Valin stöðug aðgerð er með appelsínugulum bakgrunni.

2. Veldu eina tiltæka stöðuga aðgerð.

4.2.4.3 Hvernig hætti ég valinni stöðugri aðgerð í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin fyrir stöðugar stillingar birtist.

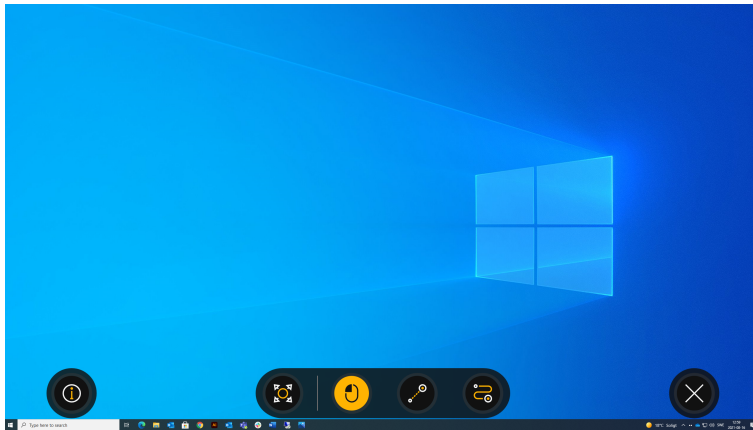

Valin stöðug aðgerð er með appelsínugulum bakgrunni.


2. Veldu  (Loka) táknmyndina til að stöðva stöðugu aðgerðina.

4.3 Aðgerðirnar á Dashboard

4.3.1 Hvernig virkja ég Dashboard í TD Control?


Dashboard er falið svo að það trufla ekki eða raski athygli notandans. Til kalla fram Dashboard fylgirðu þessum skrefum.

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

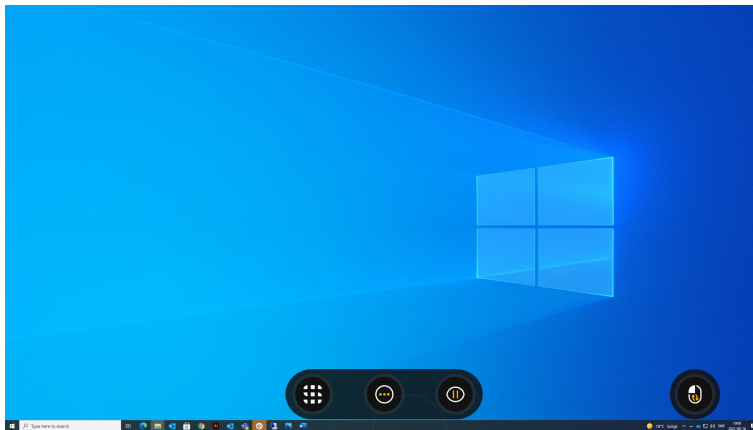

2. Veldu  (Dashboard) táknnið.


Dashboard mun opnast.

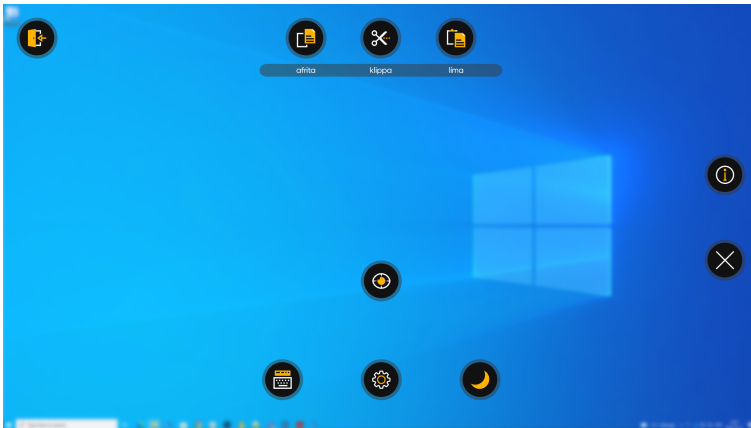

4.3.2 Hvernig virkja ég aðgerð úr Dashboard í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

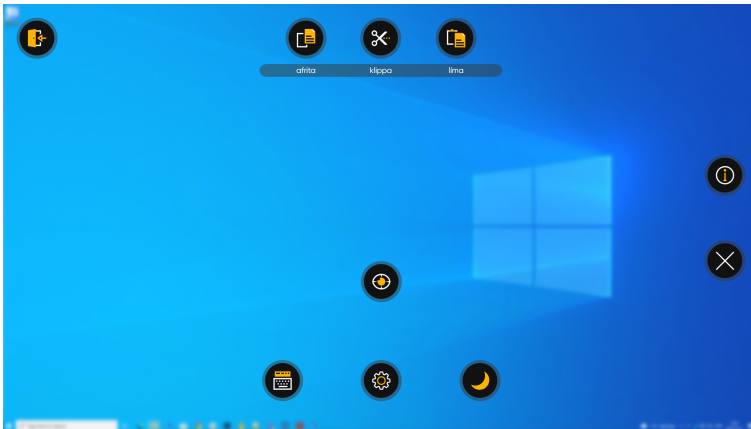

3. Veldu þá aðgerð sem á að framkvæma með Dashboard eða veldu loka hnappinn til að hætta við.


4.3.3 Er til flýtleið til að framkvæma Kvöðrun í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu  (Flýtkvörðun) aðgerðina.

4. Prófaðu kvörðunina með því að horfa á ólík markgildi.

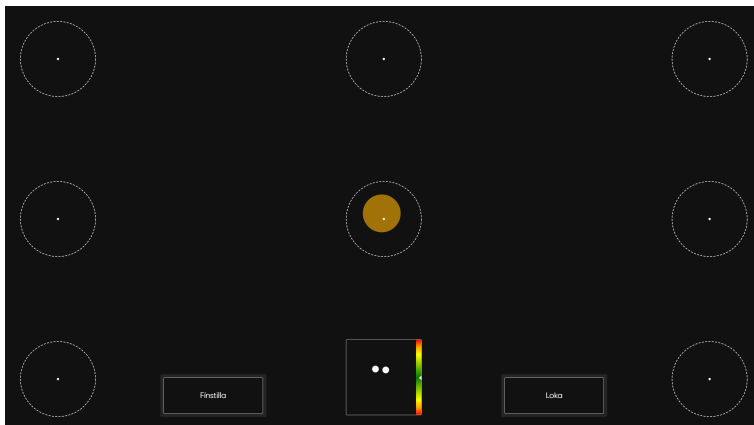

5. Ef þörf krefur, veldu **Kvörðun** hnappinn.
6. Horfðu á appelsínugulu punktana, einn í einu, sem birtast á skjánum þar til þeir hverfa.
7. Prófaðu nýju kvörðunina þína.
8. Endurtaktu skref 7–9 þar til þú ert ánægð(ur).
9. Veldu **loka** hnappinn.

Frekari upplýsingar um kvörðun eru að finna í 5.2.1 *Hvernig virkar kvörðunarferlið í TD Control?*, síða 38

4.3.4 Hvernig set ég tækið mitt í biðstöðu með TD Control?



Ef þessi eiginleiki er notaður þýðir það að einhver annar þarf að vekja tækið vegna þess að Wake-on-gaze eiginleikinn er ekki virkur.

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu  (Dashboard) tákníð.
3. Veldu  (Biðstaða) tákníð.
4. Veldu einn eftirfarandi hnappa:
 - **Biðstaða** — Til að setja tækið í biðstöðu.
 - **Hætta við** — Til að hætta við að setja tækið í biðstöðu.

4.3.5 Hvernig fæ ég aðgang að Stillingum í TD Control?




1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að fá aðgang að stillingum í TD Control.
Frekari upplýsingar um tiltækar stillingar eru að finna í 5 *TD Control Stillingar*, síða 34

4.3.6 Hvernig fæ ég aðgang að **Minnisbók** í TD Control?




1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Minnisbók) aðgerðina til að opna minnisbókina.

5 TD Control Stillingar

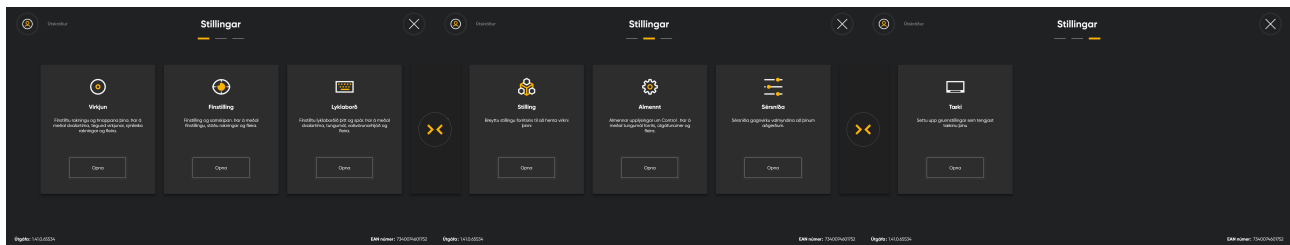

tákn	Aðgerð	Lýsing
	Virkjun	Opnar virkjun og svörun stillingar. Fyrir frekari upplýsingar, sjá <i>5.1 Virkjun</i> , síða 34.
	Kvörðun	Opnar Kvörðun stillingar. Fyrir frekari upplýsingar, sjá <i>5.2 Kvörðun</i> , síða 38.
	Lyklaborð	Opnar lyklaborðs stillingar. Fyrir frekari upplýsingar, sjá <i>5.3 Lyklaborð</i> , síða 42.
	Stilling	Opnar Stilling stillingar. Frekari upplýsingar eru að finna í <i>5.4 Stilling</i> , síða 46.
	Almennt	Opnar Almennar stillingar. Frekari upplýsingar eru að finna í <i>5.5 Almennar</i> , síða 47.
	Sérniða	Opnar Sérniða stillingar. Frekari upplýsingar eru að finna í <i>5.6 Sérniða</i> , síða 49.
	Tæki	Opnar Tækis stillingar. Frekari upplýsingar eru að finna í <i>5.7 Tæki</i> .
	Reikningurinn minn	Opnar Reikninginn minn . Fyrir frekari upplýsingar, sjá <i>5.8 Reikningurinn minn</i> , síða 52.

5.1 Virkjun

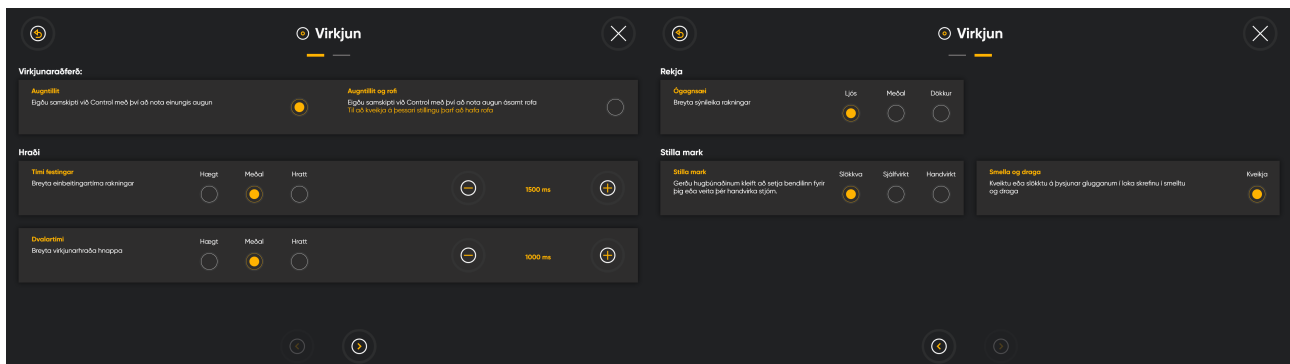

5.1.1 Virkjunaraðferð:

5.1.1.1 Hvernig breyti ég virkjunaraðferð í TD Control

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að  (Virkjun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu **Opna** hnappinn.
6. Leitaðu í **Virkjunaraðferð** hlutanum.
7. Veldu einn eftirfarandi hnappa:
 - **Augnaráð** — Eigðu samskipti við stjórnstöð með því að nota augun þín eingöngu
 - **Gaze & Switch** — Eigðu samskipti við stjórnstöð með því að nota augun ásamt rofa



Til að kveikja á þessari stillingu þarf að hafa rofa.

8. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.
9. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.1.2 Hraði

5.1.2.1 Hvernig vel ég Tíma festingar fyrir rakninguna í TD Control

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að  (Virkjun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu **Opna** hnappinn.
6. Leitaðu í **Hraði** hlutanum.
7. Veldu útvarpshnappinn fyrir **Tíma festingar** fyrir eitt eftirfarandi gilda:
 - **Hægt** (sjálfgefið)
 - Meðal
 - Hrátt

8. Fínstillið tímann með  og  hnöppunum, ef þörf krefur.
9. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.
10. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.1.2.2 Hvernig breyti/stilli ég dvalartíma fyrir hnappana í TD Control?

Dvalartíminn er tíminn sem notandinn þarf til að festa augnaráðið á aðgerðarhluti í gagnvirkum valmyndum og flettivalmyndum og til að virkja valda aðgerð.



Þessi stilling er aðeins fyrir dvalartíma hnappanna. Það er líka til dvalartímastilling fyrir lyklaborðið. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 5.3.2.1 *Hvernig breyti/stilli ég dvalartíma fyrir Lyklaborð í TD Control?*.

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að  (Virkjun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu **Opna** hnappinn.
6. Leitaðu í **Hraði** hlutanum.
7. Veldu útparpshnappinn fyrir **Dvalartíma** fyrir eitt eftirfarandi gilda:
 - **Hægt** (sjálfgefið)
 - Meðal
 - Hrátt

8. Fínstillið tímann með  og  hnöppunum, ef þörf krefur.
9. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.
10. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.1.3 Rekja

5.1.3.1 Hvernig breyti/stilli ég ógagnsæi fyrir rakninguna í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að  (Virkjun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu **Opna** hnappinn.
6. Veldu  (Næsta síða) hnappinn til að fara á næstu stillingasíðu.
7. Leitaðu í **Rakning** hlutanum.
8. Veldu útparpshnappinn fyrir **Ógagnsæi** fyrir eitt eftirfarandi gilda:

- **Ljós** (sjálfgefið)
- Meðal
- Dökkur

9. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.
10. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.1.4 Stilla markgildi

5.1.4.1 Hvernig get ég valið í hvora átt stilling markgildis mun virka í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að  (Virkjun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu **Opna** hnappinn.

6. Veldu  (Næsta síða) hnappinn til að fara á næstu stillingasíðu.
7. Leitaðu í **Stilla markgildi** hlutanum.

8. Veldu útvarpshnappinn fyrir **Stilla markgildi** fyrir eitt eftirfarandi gilda:
 - **Slökkt** (sjálfgefið) — Veldu handvirkt Stilla markgildi aðgerðina úr Interaction Menu þegar þörf er á því að stilla markgildið.
 - Sjálfvirkt — Stjórnstöðin stillir markgildið fyrir þig. Kerfið mun læra að aðlaga sig betur að notandanum með tímanum.
 - Handvirkt — Stilla markgildi ræsist sjálfkrafa þegar notandinn festir augnaráðið til að velja markgildisflötinn áður en Interaction Menu opnast til að velja óskaða aðgerð.



Notendur með minna nákvæmt augnaráð nýtur ávinnings af handvirkri stillingu markgildisins.

9. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

10. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.1.4.2 Hvernig vel ég hegðun þysgluggans fyrir **Smella og draga** í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Leitaðu að  (Virkjun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu **Opna** hnappinn.


6. Veldu  (Næsta síða) hnappinn til að fara á næstu stillingasíðu.
7. Leitaðu í **Stilla markgildi** hlutanum.

8. Veldu útvarpshnappinn fyrir **Smella og draga** til að slökka/kveikja á þysglugganum í loka skrefinu þegar þú framkvæmir smella og draga aðgerðina.

9. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.

10. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.2 Kvörðun

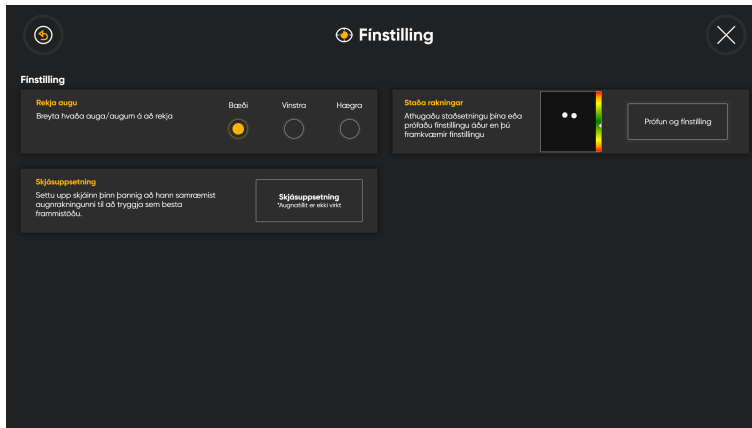

5.2.1 Hvernig virkar kvörðunarferlið í TD Control?


Kvörðunarferlið er eftirfarandi:

Prufukvörðunin er sýnd þegar kvörðun hefst, hvort sem það er flýttkvörðun eða venjuleg kvörðun. Þessi síða gefur þér tækifæri til að meta gæði kvörðunar þinnar.


Á prufukvörðunarskjánum eru hringir með litlum punkti fyrir miðju. Appelsínuguli punkturinn sýnir hvar notandinn er að horfa. Festing augnaráðs á einn punktanna sýnir hvar augnstýringin skráir augnaráðið í þeim punkti og um hversu mikla hliðrun er að ræða.



Ef appelsínuguli hringurinn er innan punktadragna hvíta hringsins er kvörðunin nógu góð til að nota TD Control.

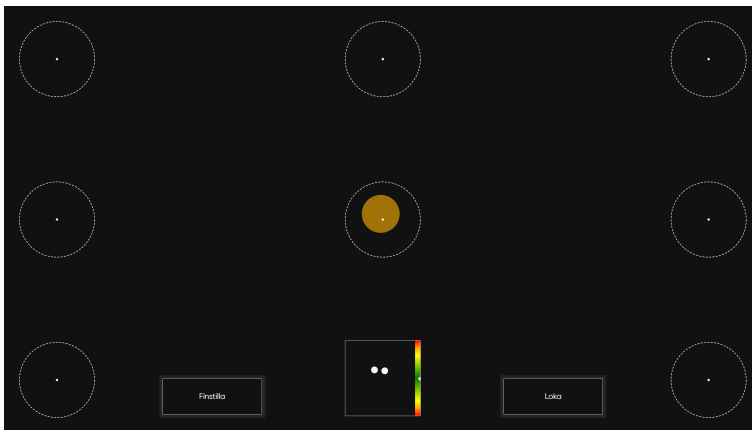

Þegar kvörðunarhnappurinn er valinn birtist fyrsti kvörðunarskjárinn. Það er svartur skjár og fyrir miðju skjásins er einn appelsínugulur punktur með svartri miðju.



Ekkert gerist fyrr en notandinn festir augnaráðið á punktinn, augnstýringin hefur skráð festingu augnaráðsins og punkturinn hefur blikkað einu sinni og horfið.



Svo lengi sem punkturinn er enn á skjánum hefur augnstýringin ekki skráð augnaráðsgögnin fyrir þá stöðu.

Nýr skjár birtist. Það er svartur skjár og í hornunum fjórum er appelsínugulur punktur með svartri miðju til staðar.



Ekkert gerist fyrr en notandinn festir augnaráðið á einn punktana, augnstýringin hefur skráð festingu augnaráðsins á þann punkt og punkturinn hefur blikkað einu sinni og horfið.



Svo lengi sem punkturinn er enn á skjánum hefur augnstýringin ekki skráð augnaráðsgögnin fyrir þá stöðu.

Þegar notandinn hefur fest augnaráðið á alla punktana á skjánum, og allir punktarnir eru horfnir, lýkur kvörðunarferlinu og þrífukvörðunarskjárinn birtist á ný.

Prófaðu kvörðunina með því að horfa á hringina á skjánum. Lokaðu þrífukvörðunarskjánum eða ræstu nýja kvörðun ef þörf krefur.

5.2.2 Hvernig veit ég hvort augað er rakið í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.



2. Veldu (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.
4. Leitaðu að  (Kvörðun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu **Opna** hnappinn.
6. Leitaðu í **Kvörðun** hlutanum.
7. Veldu útvarpshnappinn fyrir **Rekja augu** á einn eftirfarandi máta til þess að augnstýringin rekji augu notandans:
 - **Bæði** (sjálfgefið)
 - Vinstra
 - Hægra
8. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.
9. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.


5.2.3 Hvernig athuga ég stöðu notandans með því að nota **Rakningarstöðu** í TD Control?

1. Festu augnarráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.
4. Leitaðu að  (Kvörðun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu **Opna** hnappinn.
6. Athugið stöðu notandans með því að horfa á **Rakningarstöðu** kassann. Frekari upplýsingar eru að finna á **3.5 Rakningarstöðukassinn**
7. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.
8. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.2.4 Hvernig **kvarða** ég notandann í TD Control?

1. Festu augnarráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.
4. Leitaðu að  (Kvörðun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu **Opna** hnappinn.
6. Athugið stöðu notandans með því að horfa á **Rakningarstöðu** kassann. Frekari upplýsingar eru að finna á **3.5 Rakningarstöðukassinn**
7. Veldu **Prófun og kvörðun** hnappinn.

Prufukvörðunarsíðan opnast.

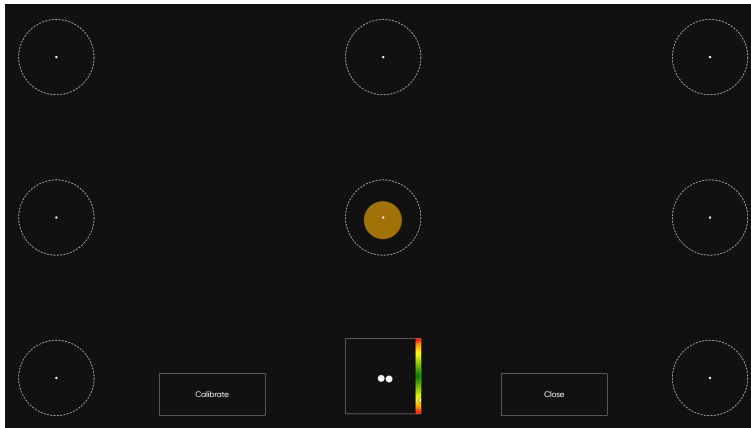

8. Veldu **Kvörðun** hnappinn.
9. Horfðu á appelsínugulu punktana, einn í einu, sem birtast á skjánum þar til þeir hverfa.
10. Prófaðu nýju kvörðunina.
11. Endurtaktu skref 7–9 þar til þú ert ánægð(ur).
12. Veldu **loka** hnappinn.

5.2.5 Hvernig breyti ég skjásuppsetningunni fyrir augnstýringuna mína í TD Control?

1. Festu augnarráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.


2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingararnar.
4. Leitaðu að  (Kvörðun) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu **Opna** hnappinn.
6. Veldu **Skjásuppsetning** hnappinn.



Þessi hnappur er ekki virkur fyrir augnaráð og þarf að velja með snertingu eða mús.

7. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum.
8. Veldu **Lokið** hnappinn
9. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.
10. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.3 Lyklaborð

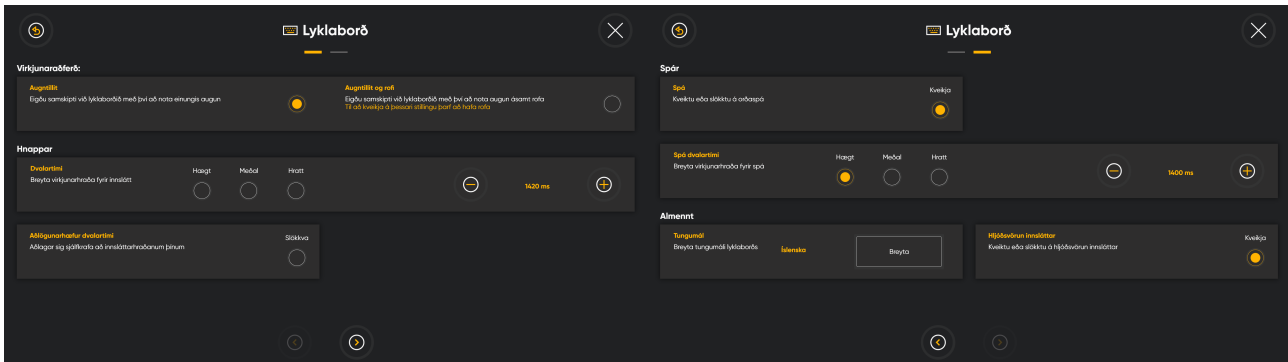

Tungumál

Valin tungumálauppsetning lyklaborðs er sýnt. Veldu **breyta** hnappinn til að breyta uppsetningu lyklaborðs í annað tungumál. Margar mismunandi tungumálauppsetningar lyklaborðs eru tiltækar.

5.3.1 Virkjunaraðferð:

5.3.1.1 Hvernig breyti ég virkjunaraðferð í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.
4. Leitaðu að  (Lyklaborð) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu **Opna** hnappinn.
6. Leitaðu í **Virkjunaraðferð** hlutanum.
7. Veldu einn eftirfarandi hnappa:
 - **Augnaráð** — Eigðu samskipti við stjórnstöð með því að nota augun þín eingöngu
 - **Augnaráð & Switch** — Eigðu samskipti við stjórnstöð með því að nota augun ásamt rofa



Til að kveikja á þessari stillingu þarf að hafa rofa.



8. Veldu (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.



9. Veldu (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.3.2 Hnappar

5.3.2.1 Hvernig breyti/stilli ég dvalartíma fyrir Lyklaborð í TD Control?



Þessi stilling er aðeins fyrir dvalartíma lyklaborðs. Það er líka til dvalartímastilling fyrir hnappana. Fyrir frekari upplýsingar, sjá 5.1.2.2 Hvernig breyti/stilli ég dvalartíma fyrir hnappana í TD Control?.

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.
4. Leitaðu að  (Lyklaborð) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu **Opna** hnappinn.
6. Leitaðu í **Hnappar** hlutanum.
7. Veldu útvarpshnappinn fyrir einn af eftirfarandi **Dvalartímum** (ms):
 - **Hægt** (sjálfgefið)
 - Meðal
 - Hratt
8. Fínstillið tímann með  og  hnöppunum, ef þörf krefur.
9. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.
10. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.3.2.2 Hvernig vel ég hegðun fyrir **Aðlögunarhæfur dvalartími** í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.
4. Leitaðu að  (Lyklaborð) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu **Opna** hnappinn.
6. Leitaðu í **Hnappar** hlutanum.
7. Veldu útvarpshnappinn fyrir **Aðlögunarhæfan dvalartíma** til að kveikja/slökkva á aðlögunarhæfum dvalartíma.
8. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.
9. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.3.3 Spá

5.3.3.1 Hvernig vel ég hegðun fyrir **Spár** í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.
4. Leitaðu að  (Lyklaborð) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu **Opna** hnappinn.

6. Veldu  (Næsta síða) hnappinn til að fara á næstu stillingasíðu.
7. Leitaðu í **Spár** hlutanum.
8. Veldu útvarpshnappinn fyrir **Spár** til að kveikja/slökkva á aðlögunarhæfum dvalartíma.
9. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.
10. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.3.3.2 Hvernig breyti/stilli ég **Spár dvalartíma** í TD Control?

1. Festu augnarráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.
4. Leitaðu að  (Lyklaborð) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu **Opna** hnappinn.
6. Veldu  (Næsta síða) hnappinn til að fara á næstu stillingasíðu.
7. Leitaðu í **Spár** hlutanum.
8. Veldu útvarpshnappinn fyrir einn af eftirfarandi **Spá dvalartímum** (ms):
 - **Hægt** (sjálfgefið)
 - Meðal
 - Hratt

9. Fínstillið tímann með  og  hnöppunum, ef þörf krefur.
10. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í lyklaborðsstillingar.
11. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.3.4 Almenn

5.3.4.1 Hvernig breyti/stilli ég **tungumáli** lyklaborðs í TD Control?

1. Festu augnarráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.
4. Leitaðu að  (Lyklaborð) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu **Opna** hnappinn.
6. Veldu  (Næsta síða) hnappinn til að fara á næstu stillingasíðu.
7. Leitaðu í **Almenna** hlutanum undir **Tungumál**. Virka tungumálið er sýnt fyrir neðan fyrirsögnina Tungumál.
8. Veldu **Breyta** hnappinn.

9. Gakktu úr skugga um að **Uppsett** hnappurinn er valinn.
10. Veldu óskað tungumál.
11. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í lyklaborðsstillingar.
12. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.
13. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.3.4.2 Hvernig hala ég niður nýju tungumáli fyrir lyklaborð í TD Control?



Gakktu úr skugga um að tækið þitt sé tengt interneti áður en þú heldur áfram.

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.
4. Leitaðu að  (Lyklaborð) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu **Opna** hnappinn.
6. Veldu  (Næsta síða) hnappinn til að fara á næstu stillingasíðu.
7. Leitaðu í **Almenna** hlutanum undir **Tungumál**. Virka tungumálið er sýnt fyrir neðan fyrirsögnina Tungumál.
8. Veldu **Breyta** hnappinn.
9. Veldu **Niðurhal** hnappinn.
10. Veldu  (Niðurhal) táknmyndina fyrir óskað tungumál.
11. Veldu **Setja upp** hnappinn til að hala niður völdu tungumáli.
12. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í lyklaborðsstillingar.
13. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.
14. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.3.4.3 Hvernig vel ég hegðun fyrir Hljóðsvörun innsláttar í TD Control?


1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.
4. Leitaðu að  (Lyklaborð) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
5. Veldu **Opna** hnappinn.
6. Veldu  (Næsta síða) hnappinn til að fara á næstu stillingasíðu.
7. Leitaðu í **Almennt** hlutanum.

8. Veldu útvarpshnappinn fyrir **Hljóðsvörun innsláttar** til að kveikja/slökkva á hljóðsvörun innsláttar.

9. Veldu  (Næsta síða) hnappinn til að fara á næstu stillingasíðu.

10. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.4 Stilling

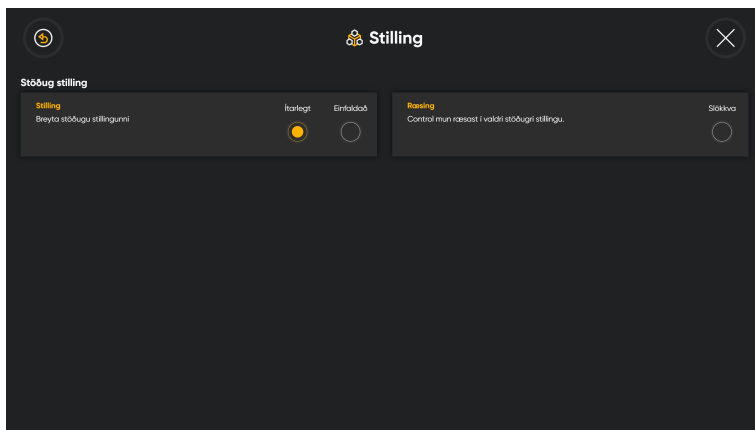

5.4.1 Stöðug stilling

5.4.1.1 Hvernig stilli ég tegund **Stöðugar stillingar** sem notuð er í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Veldu  (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

5. Leitaðu að  (Stilling) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.

6. Veldu **Opna** hnappinn.

7. Leitaðu í **Stöðug stilling** hlutanum.

8. Veldu einn eftirfarandi hnappa undir **Stilling**:

- Ítarlegt
- Einfaldað

Fyrir frekari upplýsingar, sjá 3.3.1.1 *Stöðug stilling flettivalmynda*, síða 12.

9. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í lyklorðsstillingar.


10. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.4.1.2 Hvernig geri ég stöðuga stillingu **Ræsing** virka/óvirka í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.
4. Veldu  (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.
5. Leitaðu að  (Stilling) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
6. Veldu **Opna** hnappinn.
7. Leitaðu í **Stöðug stilling** hlutanum.
8. Veldu að útlarpshnappurinn fyrir **Ræsing** skipti á milli slökkt/kveikt fyrir að stjórnstöð ræsis í valdri stöðugri stillingu.
9. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í lyklaborðstillingar.
10. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.5 Almenn

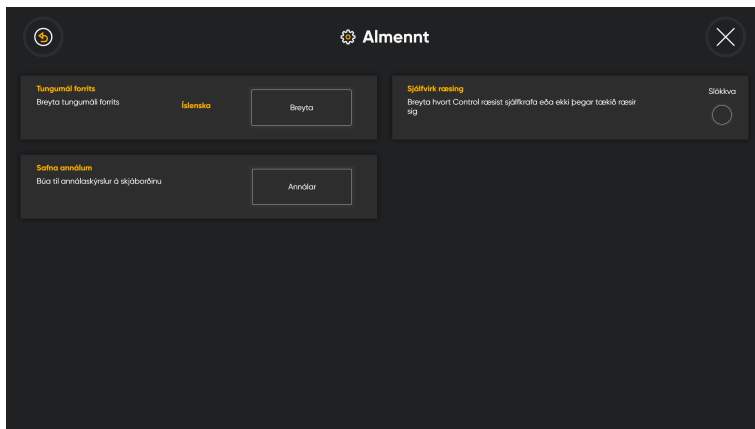

5.5.1 Hvernig vel ég Tungumál forrits fyrir TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.
4. Veldu  (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.
5. Leitaðu að  (Almennt) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
6. Veldu **Opna** hnappinn.
7. Leitaðu í **Tungumál forrits** hlutanum.
Virka tungumálið er sýnt fyrir neðan fyrirsögnina Tungumál.
8. Veldu **Breyta** hnappinn.
9. Veldu óskað tungumál.

10. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í **Almennarstillingar**.
11. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.
12. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.5.2 Hvernig framkvæmi ég **safna annálum** fyrir TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.
4. Veldu  (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.
5. Leitaðu að  (Almennu) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
6. Veldu **Opna** hnappinn.
7. Leitaðu í **Safna annálum** hlutanum.
8. Veldu **Annálar** hnappinn.
9. Veldu **Já** hnappinn

 Annálar verða búnir til á skjáborðinu.

10. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.
11. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.5.3 Hvernig vel ég **Sjálfvirka ræsing** TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.
4. Veldu  (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.
5. Leitaðu að  (Almennu) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
6. Veldu **Opna** hnappinn.
7. Leitaðu í **Sjálfvirk ræsing** hlutanum.
8. Ýttu **Sjálfvirk ræsing** skiptirofanum á **Kveikt** til að ræsa TD Control sjálfvirk þegar Windows® á tækinu ræsist.
9. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.
10. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.6 Sérniða



5.6.1 Hvernig fjarlægji ég aðgerð úr gagnvirku valmyndinni í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingar.
4. Veldu  (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.
5. Leitaðu að  (Sérniða) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
6. Veldu **Opna** hnappinn.
7. Veldu  hnappinn fyrir aðgerðina til að fjarlægja.
8. Veldu **Fjarlægja** hnappinn.
9. Endurtaktu skref 7–8 þar til þú ert ánægð(ur).
10. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.
11. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.


5.6.2 Hvernig bæti ég við aðgerð í gagnvirku valmyndina í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingar.
4. Veldu  (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.
5. Leitaðu að  (Sérniða) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
6. Veldu **Opna** hnappinn.

7. Veldu  (Bæta við) hnappinn fyrir óskaða stöðu.
8. Veldu **aðgerðina** sem þú vilt bæta við.
9. Veldu **Bæta við** hnappinn.
10. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í lyklaborðsstillingar.
11. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.7 Tæki

 Þessi eiginleiki er eingöngu til staðar í línunni I-13 og I-16.

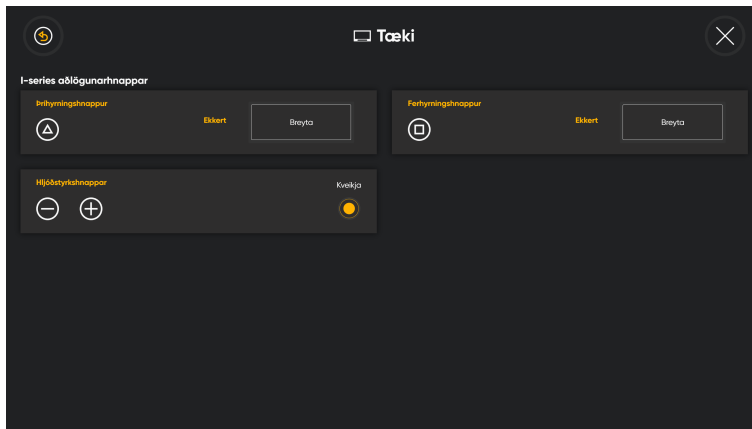

5.7.1 I-series aðlögunarhnappur

5.7.1.1 Hvernig stilli/breyti ég aðgerð fyrir þríhyrningshnappinn fyrir línuna í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.
4. Veldu  (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.
5. Veldu  (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

6. Leitaðu að  (Tæki) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.
7. Veldu **Opna** hnappinn.
8. Veldu **Breyta** fyrir val þríhyrningshnappsins
9. Veldu útvarpshnappinn fyrir einn af eftirfarandi eiginleikum:
 - Staða rakningar
 - Fínstilli
 - Skiptari
 - Lyklaborð

- **Ekkert** (Sjálfgengið)

10. Veldu **OK** hnappinn.

11. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í lyklaborðsstillingar.

12. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.7.1.2 Hvernig stilli/breyti ég aðgerð fyrir ferhyrningshnappinn fyrir l-línuna í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Veldu  (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

5. Veldu  (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

6. Leitaðu að  (Tæki) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.

7. Veldu **Opna** hnappinn.

8. Veldu **Breyta** fyrir val þríhyrningshnappsins

9. Veldu útlarpshnappinn fyrir einn af eftirfarandi eiginleikum:

- Staða rakningar
- Fínstillla
- Skiptari
- Lyklaborð
- **Ekkert** (Sjálfgengið)

10. Veldu **OK** hnappinn.

11. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í **Almennarstillingar**.

12. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.7.1.3 Hvernig geri ég hljóðstyrkshnappana virka/óvirka á l-línunni í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.

3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.

4. Veldu  (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

5. Veldu  (Næsti skjár) hnappinn á hægri hönd.

6. Leitaðu að  (Tæki) táknmyndinni til að finna rétt stillingakort.

7. Veldu **Opna** hnappinn.

8. Veldu útlarpshnappinn fyrir **Hljóðstyrkshnappar** til að kveikja/slökkva á hljóðstyrkshnöppunum.

9. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.
10. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.

5.8 Reikningurinn minn



Ókeypis myTobiiDynavox.com reikningur þinn veitir þér aðgang að mörgum gegnlegum eiginleikum, þ.á.m. tölvuskýi þar sem þú getur tekið öryggisafrit af spám og stillingum samstillinga á milli margra tækja.

5.8.1 Hvernig stofna ég reikning fyrir minn reikning í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.
4. Veldu  (Reikningurinn minn) hnappinn.
5. Veldu **Stofna reikning** hnappinn.
6. Fylltu í alla reiti með því að nota  (Breyta) hnappinn fyrir hvert gildi.
7. Veldu útvarpshnappinn til að **samþykkja skilmálana**.



Veldu **Skilmálar** til að lesa skilmálana.

8. Veldu **Stofna** hnappinn.
Staðfestingarpóstur sendist á netfang þitt.
9. Farðu inn á tölvupóstinn þinn.
10. Opnaðu **Staðfesta netfang** frá **Tobii Dynavox**.
11. Veldu **Staðfesta netfang** hnappinn í tölvupóstinum til að staðfesta netfang.

5.8.2 Hvernig skrái ég mig inn á reikninginn minn í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Flettivalmyndin birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu  (Dashboard) táknmyndina úr Dashboard.
3. Veldu  (Stillingar) aðgerðina til að opna TD Control stillingarnar.
4. Veldu  (Reikningurinn minn) hnappinn.
5. Veldu  (Breyta) hnappinn fyrir **netfangið**.
6. Sláðu inn **netfangið**.
7. Veldu  (Breyta) hnappinn fyrir **lykilorðið**.
8. Sláðu inn **lykilorðið**.
9. Veldu **Innskráning** hnappinn.

10. Veldu  (Til baka) hnappinn til að fara til baka í TD Control stillingar.
11. Veldu  (Loka) hnappinn til að hætta TD Control stillingum.


6 Switcher

Switcher er hjálparforrit sem auðveldar að skipta á milli uppsettra Tobii Dynavox forrita, almennra forrita og opinna glugga.

6.1 Hvernig fæ ég aðgang að Switcher í TD Control?

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Switcher forritið birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu Switcher 
Switcher opnast.

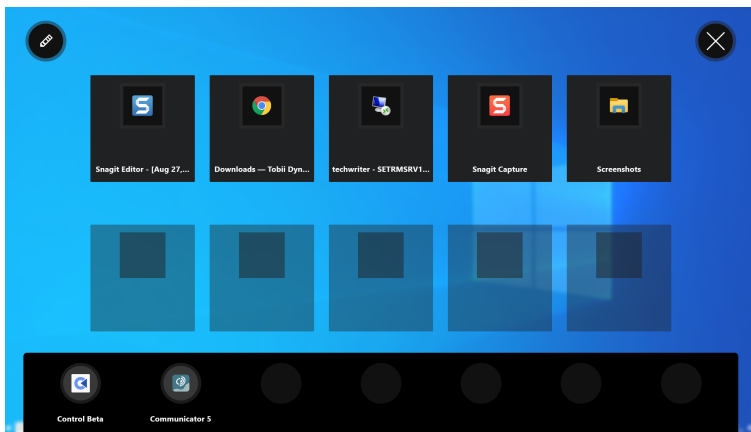


6.2 Hvernig skipti ég á forrit með Switcher

 Ef þú vilt bæta við forriti sem ekki er Tobii Dynavox skaltu ganga út skugga um að þú hafir ræst óskað forrit áður en þú heldur áfram.

1. Festu augnaráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Switcher forritið birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.

2. Veldu Switcher 
3. Veldu óskað forrit.

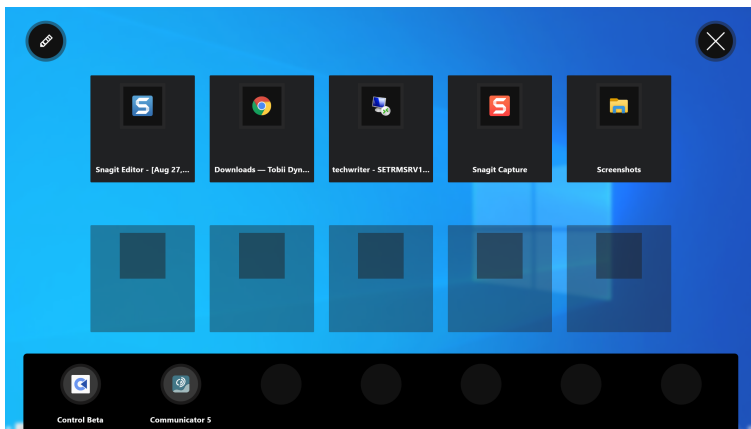

4. Veldu  (Lokið) hnappinn í efra vinstra horni.
5. Veldu  (loka) hnappinn.

6.3 Hvernig bæti ég forriti við Switcher?



Ef þú vilt bæta við forriti sem ekki er Tobii Dynavox skaltu ganga út skugga um að þú hafir ræst óskað forrit áður en þú heldur áfram.

1. Festu augnarráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Switcher forritið birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu Switcher .
3. Veldu  (Breyta) hnappinn í efra vinstra horni.
4. Veldu  (Bæta við) hnappinn fyrir óskaða stöðu.
5. Velja réttan flipa:
 - Tobii Dynavox
 - Smáforrit í gangi
6. Veldu óskað forrit.
7. Veldu  (Lokið) hnappinn í efst horni vinstra megin.
8. Veldu  (loka) hnappinn.

6.4 Hvernig fjarlægji ég forriti úr Switcher?

1. Festu augnarráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna. Switcher forritið birtist á lægri hluta skjásins fyrir miðju.
2. Veldu Switcher .
3. Veldu  (Breyta) hnappinn í efra vinstra horni.
4. Veldu  (Fjarlægja) hnappinn fyrir óskaða stöðu.
5. Veldu **Fjarlægja** hnappinn til að staðfesta.
6. Veldu  (Lokið) hnappinn í efst horni vinstra megin.
7. Veldu  (loka) hnappinn.

Höfundarréttur ©Tobii Dynavox AB. Ekki eru allar vörur og þjónustur fáanlegar á öllum mörkuðum. Tæknilýsingar geta breyst án fyrirvara. Öll vörumerki eru í eigu hlutaðeigandi eiganda.

Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækið þitt

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörunni. Stuðningssíðurnar okkar á netinu er að finna á: www.TobiiDynavox.com/support-training

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluaðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá: www.TobiiDynavox.com/contact