


PCEye 5

Brugervejledning

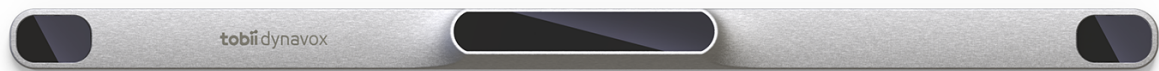

Brugervejledning PCEye 5

Version 1.3

2025-08-28

Alle rettigheder forbeholdes.

Ophavsret © Dynavox Group AB (publ)

Intet i denne vejledning må gengives, gemmes i en database eller overføres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, ved fotokopiering, ved optagelse eller på anden måde) uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren.

Den angivne ophavsret inkluderer alle former og dele af det ophavsretligt beskyttede materiale og informationer, som måtte være tilladt under nuværende gældende lov eller vedtaget herefter, inklusiv, men ikke begrænset til, materialer, der dannes af softwareprogrammerne, som vises på skærmen, så som skærmbilleder, menuer, osv.

Oplysningerne i dette dokument tilhører Dynavox Group AB. Gengivelse af hele eller dele af indholdet er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse Dynavox Group AB.

Produkter, der henvises til i dette dokument, kan enten være varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Forlaget og forfatteren gør ikke krav på disse varemærker.

Selvom alle foranstaltninger er truffet ved udarbejdelsen af dette dokument, påtager forlaget og forfatteren sig intet ansvar for fejl eller mangler, og ej heller for skader, der måtte opstå som følge af anvendelsen af oplysningerne i dette dokument eller brugen af eventuelt medfølgende programmer og kildekoder. Forlaget og forfatteren kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige for tab af fortjeneste eller anden erhvervsmæssig skade, der direkte eller indirekte er opstået som følge af, eller som påstås at være opstået som følge af indholdet i dette dokument.

Ret til ændring af indholdet uden forudgående varsel forbeholdes.

Gå til Tobii Dynavoxs websted.

www.TobiiDynavox.com for at finde en opdateret version af dokumentet.

Kontaktoplysninger:

Dynavox Group AB
Löjtnantsgatan 25
115 50 Stockholm
Sverige
+46 8 522 950 20

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA
+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
Storbritannien
+44 (0)114 481 00 11

Tobii Dynavox Pty. Ltd.
Handler under navnet Link Assistive
11B MAB Eastern Promenade
Tonsley SA, 5042
Australien
+61 8 7120 6002

Tobii Dynavox (Suzhou) Co. Ltd
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No. 5 Xinghan Street, SIP,
Suzhou
Kina 215021

Tlf. +86 512 6936 2880



Indholdsfortegnelse

1	Indledning	5
1.1	Forklaring af advarsler	5
1.2	Symboler og markører	5
1.3	Tilsigtet brug	5
1.4	Produktbeskrivelse.....	6
1.5	Pakkens indhold.....	6
2	Sikkerhed	7
2.1	Montering af PCEye	7
2.2	Epilepsiadvarsel	7
2.3	Advarsel vedrørende infrarødt lys	7
2.4	Advarsel om magnetfelt	7
2.5	Børnesikkerhed	7
2.6	Åbn ikke enheden	7
2.7	Nødstilfælde	8
2.8	Øjenstyring	8
2.9	Tredjepart.....	8
3	Kom godt i gang med PCEye 5	9
3.1	Systemkrav	9
4	Montering af PCEye 5.....	10
4.1	Standardmontering	10
4.2	Brug af PCEye-beslaget	10
4.3	Permanent fastgørelse.....	10
5	Brug af PCEye 5.....	11
5.1	Placering af bruger.....	11
5.2	Tips om brug udendørs.....	12
6	Indstillinger	13
6.1	Opsætning af Windows Hello.....	13
7	Kompatibel programsoftware.....	14
8	Vedligeholdelse af produktet	15
8.1	Temperatur og luftfugtighed	15
8.1.1	Generel anvendelse	15
8.1.2	Transport og opbevaring	15
8.2	Rengøring	15
8.3	Transport af enheden.....	15
8.4	Bortskaffelse af enheden	15

Bilag

A	Support og Garanti.....	16
A1	Kundesupport.....	16
A2	Garanti	16
B	Overensstemmelsesoplysninger	17
B1	FCC-erklæring	17
B2	Erklæring fra Industry Canada	17
B3	CE-erklæring	17
B4	Standarder	17
C	Tekniske specifikationer	18

1 Indledning

Tak, fordi du har købt en PCEye 5-enhed fra Tobii Dynavox!
Læs vejledningen grundigt, så du får mest muligt ud af dette produkt.

1.1 Forklaring af advarsler

I denne manual anvender vi tre (3) advarselsniveauer, som følger:



Symbolet Bemærk anvendes til at give brugeren besked om noget vigtigt eller noget, der kræver særlig opmærksomhed.



Symbolet Forsigtig anvendes til at informere om noget, der kan skade udstyret eller forårsage, at det ikke længere fungerer korrekt.



Symbolet Advarsel anvendes til at informere om noget, der muligvis kan skade brugeren, hvis advarslen ignoreres.

1.2 Symboler og markører

Bilaget indeholder oplysninger om symbolerne på PCEye 5, enhedens dele, tilbehør og indpakning.

Symboler eller mærker	Beskrivelse
	Er i overensstemmelse med relevante australske EMC-krav
	Bortskaffelse bør foregå i henhold til dit lands gældende bestemmelser.
	CE er en forkortelse for det europæiske fællesskab, og denne markør fortæller toldere inden for EU, at dette produkt overholder et eller flere EU direktiver
	Dette mærke er et certificeringsmærke, der anvendes på elektronik, som er fremstillet eller solgt i USA og det certificerer, at den elektromagnetiske interferens fra enheden er lavere end den maksimale grænse, godkendt af det amerikanske standardiseringsorgan Federal Communications Commission.
	IC er en forkortelse af Industry Canada, og denne markering indikerer til toldmyndighederne i Canada, at produktet overholder en eller flere Canadiske standarder.
	Producent.
	Denne markør angiver, at en elektrisk husholdningsgenstand, så som IT Audio/Video-udstyr, overholder NOM (Normas Oficiales Mexicanas) sikkerhedsstandarderne for sikkerhed i Mexico.

1.3 Tilsigtet brug

PCEye 5 er beregnet til brug sammen med TD Control for AAC (Assisterende og alternativ kommunikation) og/eller til computeradgang med en alternativ inputenhed til tastaturet eller musen til personer, der har udfordringer i forbindelse med deres evne til at tale og/eller deres adgang til en computer som følge af en skade, et handicap eller en sygdom.

1.4 Produktbeskrivelse

PCEye 5 er en øjesporingsenhed, der kan klipses fast, og som giver dig mulighed for at kontrollere computeren med blot dine øjne. Du kigger ganske enkelt på computerskærmen og vælger en kommando ved at dvæle, zoome ind og/eller ved at trykke på en kontakt. Alternativt kan du direkte kontrollere musepilen helt og aldeles med dine øjenbevægelser.

PCEye 5 passer perfekt til din laptop, kan placeres under almindelige computerskærme og kan også fastgøres til et Tobii Dynavox PCEye-beslag, der kan monteres på visse tablets.

Øjenstyringsenheden kan flyttes til forskellige computere, så længe skærmen, der er tilsluttet enheden, placeres på et bord. Når der ses bort fra installationen, betjenes PCEye 5 primært af brugeren, kontrolleres kun med øjnene, og den kalibreres til hver brugers øjenbevægelser. Formålet med PCEye 5 er at give brugeren mulighed for at kontrollere en computer, men produktet er ikke beregnet til at kontrollere andet medicinsk udstyr.

PCEye 5 giver dig hurtig, præcis og håndfri adgang til en computer og de mange måder, en computer gør dit liv bedre, og giver dig større personlig frihed. Du kan dyrke dine interesser og tage en uddannelse, vende tilbage til arbejdsmarkedet, holde kontakten til venner og familie, udtrykke dig kreativt og sørge for din egen underholdning.

Se *Bilag C Tekniske specifikationer, side 18* med flere oplysninger om skærmstørrelser.

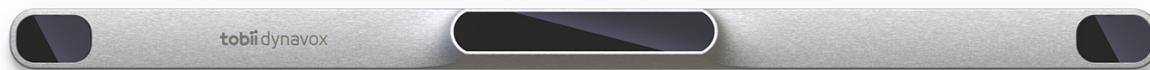


Illustration 1: PCEye 5



Dæk ikke forsiden af PCEye 5 til på nogen måde (med pynt, gule lapper, osv.), eftersom dette vil forstyrre TD Control-funktionen.



Vi anbefaler på det kraftigste, at der bruges et antivirusprogram.

1.5 Pakkens indhold

- PCEye 5
- Magnetisk monteringsplade til PCEye 5
- Adapter USB-C til USB-A
- Bæretaske
- Softwaren Computer Control fra Tobii Dynavox (link til installationsprogram)
- Vejledning
- Undervisningskort til Computer Control
- Klargørings sæt til monteringsplade (renseserviet)



Anvend kun de dele, der medfølger i pakken med PCEye 5, de dele, der beskrives i produktdokumentationen, og andet tilbehør godkendt af Tobii Dynavox i sammen med PCEye 5.

2 Sikkerhed

2.1 Montering af PCEye



PCEye 5 skal monteres i henhold til anvisningerne til de godkendte beslag, der bruges. Tobii Dynavox eller vores repræsentanter kan ikke holdes ansvarlige for skader eller personskade eller skader på ejendom som følge af, at PCEye 5 falder af den monterede opsætning. Montering af PCEye 5 sker helt på brugerens eget ansvar.

Den dobbeltsidede tape, der følger ned de selvklæbende monteringsplader (hvis relevant) er beregnet til permanent fastgørelse af beslagene til skærmen/den bærbare computer. Forsøg på at fjerne beslagene efter fastgørelse med den medfølgende tape kan resultere i skade på både skærmen/laptoppen samt beslagene.

Undgå at slikke på tapen eller at putte nogen del af tapen eller de magnetiske Monteringsplader i nogens mund eller på nogens krop.

Monter ikke PCEye 5 på skærme, der er anbragt over en brugers hoved eller ansigt, medmindre dette gøres som en del af en dedikeret løsning med fast montering.

2.2 Epilepsiadvarsel



Personer med **fotosensitiv epilepsi** kan få epileptiske anfald eller miste bevidstheden, når de udsættes for visse typer almindeligt forekommende blinkende lys eller lysmønstre. Dette kan ske, selvom personen ikke lider af epilepsi eller aldrig har haft epileptiske anfald.

En person med fotosensitiv epilepsi har sandsynligvis også problemer med tv-skærme, visse arkadespil og blinkende fluorescerende pærer. Disse personer kan få et anfald, når de ser visse billeder eller mønstre på en skærm, eller når de udsættes for lyskilderne fra en øjenstyringsenhed. Det anslås, at ca. 3-5 % af personer med epilepsi lider af denne form for fotosensitiv epilepsi. Mange, der lider af fotosensitiv epilepsi, oplever en "aura" eller underlig fornemmelse, lige før anfaldet opstår. Hvis du føler dig underligt tilpas under brug, skal du flytte øjnene væk fra øjenstyringsenheden.

2.3 Advarsel vedrørende infrarødt lys



PCEye 5 udsender et pulserende infrarødt lys efter aktivering. Visse medicinske anordninger er følsomme over for forstyrrelser fra infrarødt lys og/eller stråling. Anvend derfor ikke PCEye 5 i nærheden af sådanne medicinske anordninger, da dette kan påvirke anordningernes præcision og funktionalitet.

2.4 Advarsel om magnetfelt



Det magnetiske monteringsystem til PCEye 5 indeholder magneter. Magnetfelter kan påvirke funktionen af pacemakere til hjertet og implanterede hjertedefibrillatorer. Som en generel regel skal du holde en afstand på mindst 15 centimeter mellem enheder med magneter og din hjerteenhed.

2.5 Børnesikkerhed



PCEye 5 er en mekanisk konstrueret enhed. Den består af mange separate dele, der er samlet. Hvis et barn får fat i enheden, er der en risiko for, at nogle af enkeltdelene falder af. Disse dele kan udgøre en kvælningssfare eller udsætte barnet for andre farer.

Små børn må ikke have adgang til eller bruge enheden uden at være under opsyn af forældre eller værge.

2.6 Åbn ikke enheden



Åbn enheden, annulleres garantien! Der er ingen komponenter indeni, som brugere kan anvende eller reparere. Kontakt Tobii Dynavox Support, hvis din PCEye 5 ikke fungerer korrekt.

2.7 Nødtilfælde



Undlad at bruge enheden til nødopkald eller banktransaktioner. Vi anbefaler, at der rådes over flere kommunikationsmetoder i tilfælde af en nødsituation. Banktransaktioner må kun gennemføres med et system, som din bank anbefaler, og som er godkendt i henhold til bankens standarder.

2.8 Øjenstyring



Nogle personer kan opleve træthed (som følge af bevidst fokusering med øjet og stærk koncentration) eller tørre øjne (som følge af færre blink), når de først begynder at bruge TD Control. Hvis du oplever, at du bliver træt, eller dine øjne bliver tørre, skal du starte langsomt og begrænse tiden for din brug af TD Control til et niveau, som er behageligt for dig. Fugtgivende øjendråber kan hjælpe med at bekæmpe tørre øjne.

2.9 Tredjepart



Tobii Dynavox påtager sig intet ansvar for konsekvenser som følge af, at PCEye 5 bruges på en måde, der er uforenelig med enhedens tilsigtede brug, herunder brugen af PCEye 5 med software og/eller hardware fra tredjepart, der ændrer den tilsigtede brug.

3 Kom godt i gang med PCEye 5

3.1 Systemkrav

Vi anbefaler følgende minimumssystemkrav for PCEye 5:

Komponent	Krav
Computer og processor	2,0 gigahertz (GHz) eller hurtigere, 6. generation Intel Core (i3/i5/i7-6xxx) og senere eller tilsvarende AMD-processor på 64-bit. (anbefalet minimum).
Hukommelse (RAM)	8 gigabyte (GB) RAM (anbefalet minimum)
Harddisk	450 fri harddiskplads (MB)
USB	USB-C (USB-A med adapter)
Styresystem	Windows 10 (64-bit) RS3 eller nyere

4 Montering af PCEye 5

4.1 Standardmontering

Følg disse trin for at montere PCEye 5 på en enhed:

1. Download softwarepakken TD Control fra: <https://qrco.de/PCEyeCC>.
Installér den downloadede softwarepakke TD Control.
2. Følg anvisningerne på skærmen for at montere PCEye 5 på enhedens ramme.
3. Færdig!

4.2 Brug af PCEye-beslaget

Følg installationsvejledningen til PCEye-beslaget for at montere PCEye 5 på beslaget.

4.3 Permanent fastgørelse

Der findes to (2) M3-skruer på bagsiden af PCEye 5 til permanent fastgørelse af PCEye 5. Afstanden fra midtpunkt til midtpunkt (markeret med et X) i *Illustration 2: Afstand fra midtpunkt til midtpunkt mellem M3-skruerne, side 10* er 155 mm. PCEye 5 er kompatibel med GA EyeGaze-Bracket fra Rehadapt GmbH.



Illustration 2: Afstand fra midtpunkt til midtpunkt mellem M3-skruerne

5 Brug af PCEye 5

5.1 Placering af bruger

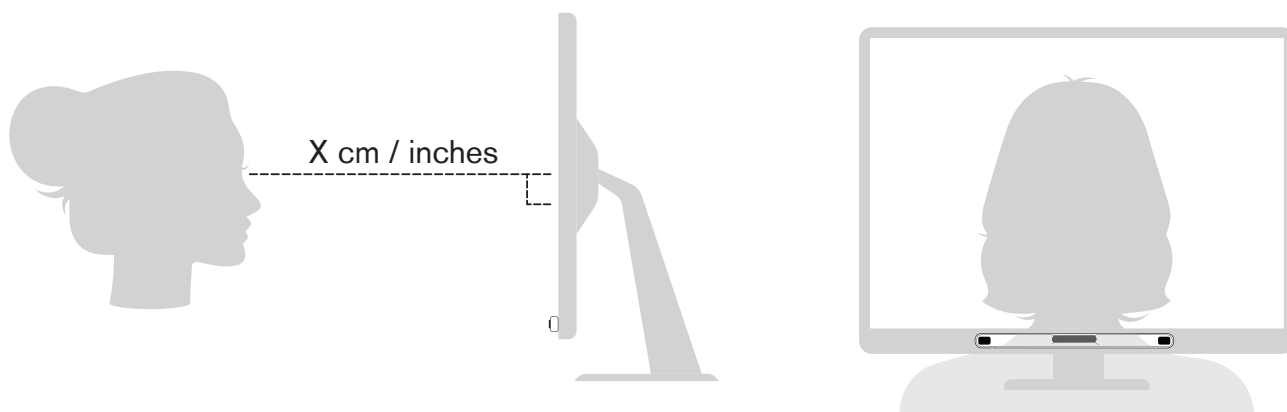


Illustration 3: Placering

Den monterede PCEye 5, fastgjort til den magnetiske monteringsplade og til din enhed, er designet til at fungere optimalt, når den er parallel med brugerens øjne i en afstand af ca. 50 — 95 cm (20 to 37 inches), se *Illustration 3: Placering, side 11* eller *Illustration 4: Placering når brugeren sidder skråt eller ligger ned, side 11*.

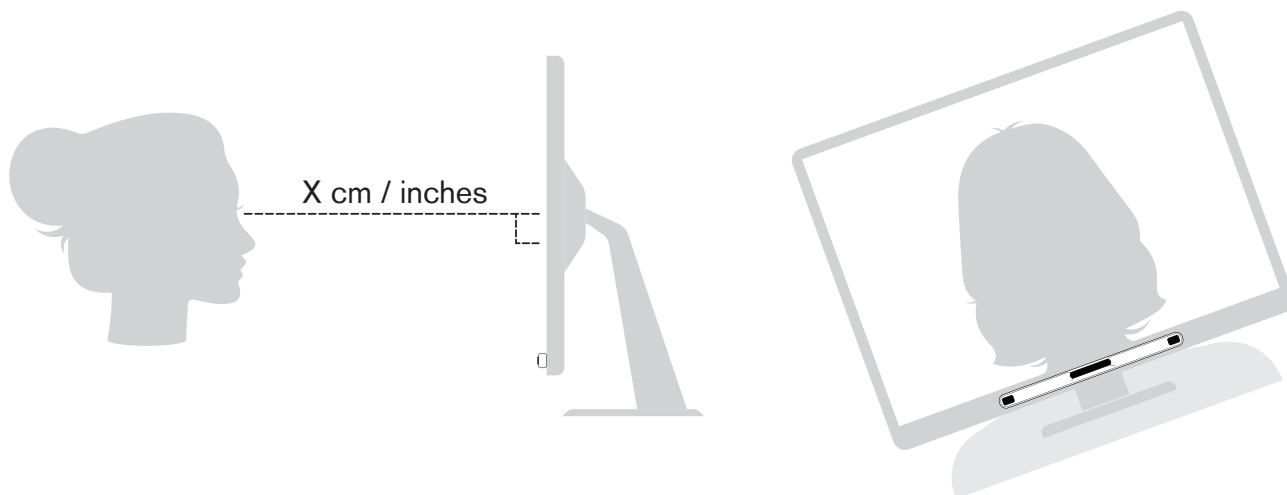


Illustration 4: Placering når brugeren sidder skråt eller ligger ned

Sidder brugeren således skråt eller ligger ned, skal PCEye 5 med skærm og computerenhed også vippes, så brugerens øjne holdes parallelle med skærmen i den bedst mulige afstand. Se *Illustration 4: Placering når brugeren sidder skråt eller ligger ned, side 11*.



Sørg for, at brugeren sidder eller ligger komfortabelt i forhold til den optimale placering af enheden og den optimale afstand. Vær også opmærksom på, at brugerens komfort øges, og at TD Control fungerer bedre, hvis solen ikke skinner direkte på skærmen eller i brugerens øjne.

Brugerens optimale afstand fra PCEye 5 monteret på en skærm/laptop varierer afhængigt af skærmens størrelse. Brugeren skal være placeret i den optimale afstand for at sikre den bedst mulige TD Control.

Generelt kan det siges, at jo større skærmen er, jo længere væk skal brugeren være fra kombinationen af øjenstyringsenheden/skærmen for at opnå den bedst mulige brug af TD Control.

Brug ikke skærme, der er større end den angivne maksimumskærmstørrelse, for optimal brug af TD Control. Se *Bilag C Tekniske specifikationer, side 18* med flere oplysninger.

5.2 Tips om brug udendørs

Her er nogle tips til at opnå gode resultater med øjenstyringsenheden, når du bruger øjenstyringsenheden udendørs, især i skarpt sollys.

- Det kan være fordelagtigt at kalibrere igen på forskellige tidspunkter af dagen på grund af ændringer i omgivelserne, såsom ændring i belysning eller skift mellem ophold indendørs eller udendørs.
- Brug en baseballkasket eller lignende til at skygge for øjnene. På den måde får du meget bedre resultater med øjenstyringsenheden.
- Du får de bedste resultater med øjenstyringsenheden ved at undgå direkte sollys på enheden.

6 Indstillinger

6.1 Opsætning af Windows Hello

1. Åbn menuen **Windows Start**.
2. Vælg din **Konto**.
3. Vælg **Skift kontoindstillinger**.
4. Vælg **Indstillinger for logon**.
5. Du skal oprette en pinkode, før du kan fortsætte.
6. Vælg knappen **Tilføj** under **Pinkode**, og følg de næste trin.



Skriv pinkoden ned, og opbevar den et sikkert sted.



Når du har gjort dette, låses indstillingerne til opsætning af Windows Hello op.

7. Når du har valgt en pinkode, kan du vælge **Konfigurér** under **Windows Hello** og **Ansigtsgenkendelse**.
8. Hvis du gerne vil have flere oplysninger om **Windows Hello**, skal du vælge **Lær mere om Windows Hello**. Eller du kan vælge **Kom i gang** for at fortsætte.
9. Kameraet i øjenstyringsenheden hjælper dig nu med at placere dig foran skærmen ved en live-visning via kameraet. Når du har placeret dig korrekt foran kameraet, starter opsætningen af ansigtsgenkendelsen automatisk.
10. Når du har afsluttet opsætningen, vises en indstilling til **Forbedring af genkendelse**.



Den kan være ganske nyttig, hvis du bruger briller, da den giver mulighed for optagelse med eller uden briller.

7 Kompatibel programsoftware

PCEye 5 indeholder en række funktioner afhængigt af brugerens behov og den installerede programsoftware.

Gå til www.tobiidynavox.com for at finde hjælp og dokumentation til de forskellige kompatible programmer.

8 Vedligeholdelse af produktet

8.1 Temperatur og luftfugtighed

8.1.1 Generel anvendelse

Det er bedst at opbevare PCEye 5 et tørt sted med stuetemperatur. De anbefalede intervaller for temperatur og luftfugtighed er følgende:

- Temperatur: 10-35 °C
- Luftfugtighed: 20-80% (relativ luftfugtighed, ingen kondens på enheden)

8.1.2 Transport og opbevaring

Under transport og opbevaring gælder følgende anbefalede intervaller for temperatur og luftfugtighed:

- Temperatur:
- Luftfugtighed: (ingen kondens på enheden)
- Atmosfærisk tryk:

PCEye 5 er hverken vandtæt eller vandafvisende. PCEye 5 må ikke opbevares under meget fugtige eller på anden måde våde forhold. Enheden må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Vær omhyggelig med ikke at spilde væsker på enheden.

8.2 Rengøring

Inden rengøring af PCEye 5-enheden, skal du lukke computeren, som den er forbundet til, ned og afbryde alle kabler og stik. Brug en blød, let fugtig og fnugfri klud. Sørg for, at der ikke trænger fugt ind i enhedens åbninger. Brug ikke vinduespuddsemidler, almindelige rengøringsmidler, aerosolsprayer, opløsningsmidler, alkohol, ammoniak eller slibende rengøringsmidler til rengøring af enheden.

Det anbefales, at enheden rengøres regelmæssigt.

8.3 Transport af enheden

Fjern USB-kablet, og brug opbevaringstasken. PCEye 5 er relativt sart, og filteret kan blive ridset, hvis det ikke beskyttes ordentligt. Sørg derfor for at beskytte enheden, når den bæres eller pakkes ned.

Hvis enheden skal indleveres til reparation, skal sendes eller skal medbringes på rejse, skal du bruge den oprindelige emballage.



Når PCEye 5 er fastgjort til en skærm/laptop, må du ikke bære de tilsluttede enheder ved at kun at holde i PCEye 5. PCEye 5 kan ikke bære vægten af skærmen/laptoppen, og enheden kan gå i stykker, falde ned eller tippe over, fordi vægtbalancen ændres, hvilket kan føre til permanent skade på begge dele. Tobii Dynavox kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af dette.

8.4 Bortskaffelse af enheden

PCEye 5-enheden må ikke bortskaffes sammen med husholdnings- eller kontoraffald. Følg de lokale regler for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

Bilag A Support og Garanti

A1 Kundesupport

Kontakt din lokale repræsentant eller Tobii Dynavox Support, hvis du har brug for hjælp. Sørg for at have adgang til din PCEye 5 og helst også til internettet for at få hjælp hurtigst muligt. Du skal også kunne oplyse serienummeret på enheden, hvilket du kan finde på bagsiden af enheden. Find vores supportsider online på: www.tobiidynavox.com eller www.myTobiiDynavox.com.

A2 Garanti

Læs garantien her: <https://www.tobiidynavox.com/pages/warranties>.



Tobii Dynavox garanterer ikke, at softwaren på PCEye 5 dækker dine behov, at driften af softwaren sker uden afbrydelser eller uden fejl, eller at alle fejl i softwaren bliver rettet.



Tobii Dynavox garanterer ikke, at PCEye 5 dækker kundens behov, at driften af PCEye 5 sker uden afbrydelser, eller at der ikke findes fejl eller andre defekter i PCEye 5. Kunden anerkender, at PCEye 5 ikke fungerer for alle personer og under alle lysforhold.



Læs brugervejledningen grundigt, før du tager enheden i brug. Garantien dækker kun, hvis enheden bruges i overensstemmelse med brugervejledningen. Garantien bortfalder, hvis PCEye 5-enheden åbnes eller skilles ad.



Det anbefales at gemme den originale indpakning til PCEye 5.

Hvis du skal returnere enheden til Tobii Dynavox på grund af problemer eller med henblik på reparation dækket under garantien, tilrådes det at bruge den originale emballage eller tilsvarende til forsendelsen. De fleste fragtfirmaer kræver mindst 2 tommer emballeringsmateriale pakket rundt om enheden.

Bemærk: I henhold til amerikanske myndighedskrav skal al emballage (herunder kasser), der sendes til Tobii Dynavox, bortskaffes.

Bilag B Overensstemmelsesoplysninger



Sidesættet PCEye 5 er CE-mærket, hvilket angiver overensstemmelse med de væsentlige helbreds- og sikkerhedskrav i EU-direktiverne.

B1 FCC-erklæring

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 af FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere eventuel interferens, der modtages, inkl. interferens der kan forårsage uønsket drift.



Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Tobii Dynavox, kan annullere brugerens tilladelse til at bruge udstyret i henhold til FCC-reglerne.

Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed i klasse B i overensstemmelse med del 15 i de amerikanske FCC-regler. Disse grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i installationer i boligområder. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.

Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens for modtagelse af radio- og tv-signaler, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til et andet netstik end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

B2 Erklæring fra Industry Canada

Dette digitale apparat i klasse B er i overensstemmelse med Canadas direktiv ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

B3 CE-erklæring

PCEye 5 overholder følgende direktiver:

- 2017/745/EU (MDR) – Medicinsk udstyr
- 2011/65/EU (RoHS) – Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer
- 2014/30/EU (EMC) – Elektromagnetisk kompatibilitet

B4 Standarder

PCEye 5 overholder følgende standarder:

- FCC del 15, klasse B
- ICES-003 udgave 6:2016 klasse B
- EN 55032: 2012+AC: 2013 klasse B
- EN 55024:2010+A1:2015
- EN 61000-3-2: 2014
- EN 61000-3-3: 2013
- AS/NZS CISPR 32:2015

Bilag C Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer	PCEye 5
Behandlingsenhed	Behandlingsenhed Tobii EyeChip™ med fuldt integreret behandling
Skærm	USB-stik Type-C
Arbejdsafstand	45-95 cm
Skærmstørrelse ¹ ved 65 cm brugerafstand	Anbefalet op til 27 tommer
Frihed til hovedbevægelse ² (bredde x højde)	20 × 20cm ved en afstand på 50 cm fra skærmen 35 × 35 cm ved en afstand på 65-80 cm fra skærmen
Placering Afstand (fra skærmen) Sporingsboksmaal (bredde × højde) Sporingsboksdybde	45-95 cm 20 × 20-35 × 35 cm 50 cm
Blikdatahastighed	33 Hz
Blinkprøvehastighed	133 Hz
Teknik for øjenstyring	Øjenstyring med videobaseret pupil- og hornhinderefleksion med tilstande for mørk og lysstærk pupilbelysning.
Kan bruges udendørs	Ja
Brugerkalibrering (tidligere sporingsrobusthed)	> 98 %
Opdag Gaze Interaktion > 30 Hz	98 % for 95 % af populationen ³
Blinkpræcision For 95 % af befolkningen ⁴	< 1,58 grader
Blinkpræcision For 95 % af befolkningen ⁴	< 0,2°
Maksimal hastighed for hovedbevægelse Øjenposition Blikdata	40 cm/s (15,7 tommer/s) 10 cm/s (3,9 tommer/s)
Maksimal hovedtipning	25°
Maksimal drejning på skrå	25°
Datastrøm og datahastighed Gazeforsinkelse Gazegendannelse	17 ms 0 ms
Montering	Integreret
Strømforsyning	Integreret
Enhedens mål (længde × højde × bredde)	285 mm × 15 mm × 8,2 mm
Enhedens vægt	93 g

Tekniske specifikationer	PCEye 5
	1. For skærme, der er større end anbefalet, kan der være en begrænsning af kvaliteten af dvæle-præcisionen i de øvre hjørner af skærmen, når brugeren sidder tæt på skærmen. 2. Frihed til hovedbevægelse beskriver den volumen foran sporesystemet, som brugeren skal have på mindst et øje. Tallene er specificerede parallelt/retvinklet på skærmoverfladen. 3. Testpopulationen udelukkede personer, som brugte korregerende briller med en dioptri på +5,00 eller højere eller led af en øjensygdom. 4. Præcisionsgraden og præcision i forhold til befolkningsprocenten stammer fra resultater fra omfattende afprøvning udført af repræsentanter fra hele befolkningen. Vi har anvendt hundredtusinder af diagnostiske billeder og udført tests på omkring 800 personer med forskellige forhold, syn, etnisk baggrund, hverdagsstøv, pletter omkring øjnene, øjnene ude af fokus osv. Dette har resulteret i en meget mere robust øjenstyringsoplevelse med høj ydeevne og en meget mere realistisk repræsentation af ydeevnen for hele populationen og ikke kun en matematisk ideel situation. De "ideelle" tal er den forrige standard for måling af præcision, som tidligere var anvendt for Tobii og for alle andre øjenstyringskonkurrenter. De "ideelle" tal er gavnlige for at få en generel forståelse af sammenlignelig kvalitet og ydeevne, men de er dog ikke gældende for en virkelig anvendelsessituation i samme grad som en kvantitativ præcisionsmåling og præcision i forhold til procentdel af befolkningen, som er baseret på omfattende afprøvning udført af repræsentanter fra hele befolkningen.

Support til din Tobii Dynavox-enhed

Få hjælp online

Se den produktspecifikke supportside for din Tobii Dynavox-enhed. Den indeholder opdaterede oplysninger om problemer samt tips og tricks til produktet. Find vores supportsider på: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Kontakt din AAC-konsulent eller forhandler

Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, skal du bede din AAC-konsulent hos Tobii Dynavox eller en godkendt forhandler om hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan bedst hjælpe dig med tips og produkttræning. Besøg <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us> med kontaktoplysninger.