


PCEye 5

Alle rechten voorbehouden

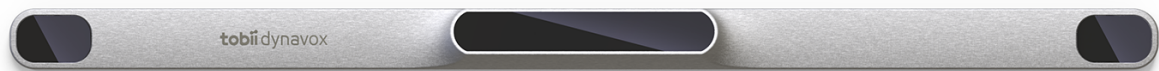

tobii dynavox

Alle rechten voorbehouden PCEye 5

Versie 1.3

2025-08-28

Alle rechten voorbehouden.

Copyright © Dynavox Group AB (publ)

Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke wijze dan ook (elektronisch, met gebruik van fotokopieën en opnamen of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De geclaimde copyright-bescherming omvat alle vormen van auteursrechtelijk beschermd materiaal en auteursrechtelijk beschermde informatie volgens de wet of hierin toegestaan, inclusief en niet beperkt tot materialen gegenereerd door de softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals schermweergaven en menu's.

De informatie in dit document is eigendom van Dynavox Group AB. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dynavox Group AB is verboden.

Producten waarnaar in dit document wordt verwezen kunnen handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. De uitgever en de auteur maken geen aanspraak op deze handelsmerken.

Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen in de voorbereiding van dit document, zijn de uitgever en de auteur niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen, noch voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in dit document of uit het gebruik van programma's en eventuele bijbehorende broncode. De uitgever en de auteur kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van winst of enige andere commerciële schade die direct of indirect is veroorzaakt of wordt vermeend te zijn veroorzaakt door dit document.

De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Raadpleeg de Tobii Dynavox-website.

www.TobiiDynavox.com voor bijgewerkte versies van dit document.

Contactgegevens:

Dynavox Group AB
Löjtnantsgatan 25
115 50 Stockholm
Zweden
+46 8 522 950 20

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
VS
+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
Verenigd Koninkrijk
+44 (0)114 481 00 11

Tobii Dynavox Pty. Ltd.
Handelend als Link Assistive
11B MAB Eastern Promenade
Tonsley SA, 5042
Australië
+61 8 7120 6002

Tobii Dynavox (Suzhou) Co. Ltd
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP,
Suzhou
China 215021

+86 512 69362880



Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	5
1.1	Verklaring van waarschuwingen	5
1.2	Symbolen en opschriften	5
1.3	Beoogd gebruik.....	5
1.4	Productomschrijving.....	6
1.5	Inhoud van het pakket.....	6
2	Veiligheid.....	7
2.1	PCEye bevestigen	7
2.2	Epilepsiewaarschuwing.....	7
2.3	Waarschuwing voor infraroodstraling.....	7
2.4	Waarschuwing voor magnetische velden	7
2.5	Veiligheid voor kinderen.....	7
2.6	Maak het apparaat niet open	8
2.7	Noodgevallen	8
2.8	Oogbesturing	8
2.9	Derden	8
3	Aan de slag met PCEye 5.....	9
3.1	Systeemvereisten	9
4	PCEye 5 bevestigen	10
4.1	Standaardmontage	10
4.2	De PCEye-beugel gebruiken	10
4.3	Permanente bevestiging	10
5	PCEye 5 gebruiken	11
5.1	De gebruiker positioneren.....	11
5.2	Tips voor gebruik buitenshuis	12
6	Instellingen.....	13
6.1	Installatie Windows Hello	13
7	Toepasselijke applicatiesoftware.....	14
8	Onderhoud van het product	15
8.1	Temperatuur en vochtigheid	15
8.1.1	Algemeen gebruik	15
8.1.2	Transport en opslag	15
8.2	Reiniging	15
8.3	Het apparaat vervoeren	15
8.4	Het apparaat weggooien.....	15

Bijlage

A	Ondersteuning en garantie.....	16
A1	Klantenondersteuning	16
A2	Garantie	16
B	Conformiteitsinformatie.....	17
B1	FCC-verklaring	17
B2	Industry Canada-verklaring	17
B3	CE-verklaring	17
B4	Normen	17
C	Technische specificaties	18

1 Inleiding

Hartelijk dank voor de aankoop van een PCEye 5-apparaat van Tobii Dynavox!

Neem de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, zodat dit product optimaal presteert.

1.1 Verklaring van waarschuwingen

In deze handleiding maken we gebruik van drie (3) soorten waarschuwingen:



Het “Let op”-symbool stelt de gebruiker op de hoogte van een belangrijke situatie of een situatie die speciale aandacht vereist.



Het “Voorzichtig”-symbool stelt de gebruiker op de hoogte van een situatie die kan leiden tot beschadiging van of storing in de apparatuur.



Het “Waarschuwing”-symbool stelt de gebruiker op de hoogte van een situatie die mogelijk kan leiden tot letsel bij de gebruiker indien de waarschuwing wordt genegeerd.

1.2 Symbolen en opschriften

Deze bijlage biedt informatie over de symbolen op de PCEye 5, de bijbehorende onderdelen en accessoires en de verpakking.

Symbool of opschrift	Beschrijving
	Voldoet aan relevante Australische EMC-vereisten
	Weggoaien volgens de vereisten in uw land.
	CE is een afkorting van de Europese Gemeenschappen en hieruit blijkt voor douanebeambten in de Europese Unie dat het product voldoet aan een of meer van de Europese richtlijnen.
	Dit is een certificeringsmarkering voor elektronische producten die in de Verenigde Staten worden gefabriceerd of verkocht. Dit geeft aan dat de elektromagnetische interferentie van het apparaat binnen de limieten valt zoals goedgekeurd door de Amerikaanse FCC (Federal Communications Commission).
	IC staat voor Industry Canada en aan de hand van dit merkteken weten douanebeambten in Canada dat het product voldoet aan een of meer Canadese normen.
	Fabrikant.
	De markering duidt op naleving door elektronische apparaten zoals IT- en audio/video-apparatuur van NOM-veiligheidsnormen (Normas Oficiales Mexicanas) in Mexico.

1.3 Beoogd gebruik

De PCEye 5 is bestemd voor gebruik bij TD Control voor OC (ondersteunende communicatie) en/of als invoerapparaat voor de computer als alternatief voor het toetsenbord en de muis voor mensen die moeite hebben met praten en/of computerbediening vanwege letsel, een beperking of een ziekte.


1.4 Productomschrijving

De PCEye 5 is een eenvoudig aan te brengen oogbesturingsmodule waarmee u uw computer met uw ogen kunt bedienen. Kijk gewoon naar het computerscherm en selecteer opdrachten door uw blik te fixeren ('dwellen'), in te zoomen en/of op een schakelaar te klikken. Of bedien rechtstreeks de muiscursor volledig met uw oogbewegingen. U kunt de PCEye 5 gemakkelijk op uw laptop of onder een computerscherm bevestigen. Hij kan ook op een Tobii Dynavox PCEye-beugel worden bevestigd en op bepaalde tablets worden gemonteerd.

De oogbesturingsmodule kan tussen meerdere computers worden uitgewisseld, zolang de monitor met het bevestigde apparaat op een tafel is geplaatst. Behalve bij de installatie wordt de PCEye 5 voornamelijk door de gebruiker bediend met behulp van zijn/haar ogen en het apparaat wordt gekalibreerd voor de oogbewegingen van elke gebruiker. Met de PCEye 5 kan de gebruiker een computer bedienen, maar het apparaat is niet bedoeld om enige andere medische hulpmiddelen te bedienen.

Met de PCEye 5 kunt u snel, nauwkeurig en handsfree gebruikmaken van de talrijke mogelijkheden van een computer voor een rijker leven en meer persoonlijke onafhankelijkheid. Zo kunt u uw interesses nastreven en studeren, weer meedoen op de arbeidsmarkt, in contact blijven met vrienden en familie, uzelf op artistiek gebied uiten en invulling geven aan dagbesteding.

Voor meer informatie over schermgroottes raadpleegt u *Bijlage C Technische specificaties, pagina 18*.

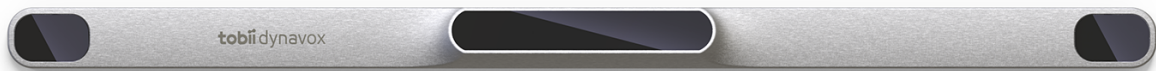

Afbeelding 1: PCEye 5



De voorkant van de PCEye 5 mag op geen enkele manier worden bedekt (bijvoorbeeld met versieringen of post-itblaadjes), aangezien dit de prestaties van TD Control negatief kan beïnvloeden.



Het gebruik van een antivirusprogramma wordt sterk aanbevolen.

1.5 Inhoud van het pakket

- PCEye 5
- Magnetische montageplaat voor PCEye 5
- USB-C-naar-USB-A-adapter
- Draagtas
- Tobii Dynavox Computer Control-software (link naar het installatieprogramma)
- Introductiehandleiding
- Trainingskaarten voor Computer Control
- Voorbereidingspakket voor montageplaat (reinigingsdoekje)



Gebruik uitsluitend de items die zijn inbegrepen in het PCEye 5-pakket, de items die worden beschreven in de productdocumentatie en andere goedgekeurde Tobii Dynavox-accessoires in combinatie met de PCEye 5.

2 Veiligheid

2.1 PCEye bevestigen



De PCEye 5 moet worden gemonteerd volgens de instructies voor goedgekeurde montagebevestigingen. Tobii Dynavox of zijn vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen als een PCEye 5 van een gemonteerde configuratie valt. De montage van een PCEye 5 gebeurt volledig op eigen risico van de gebruiker.

Het dubbelzijdige tape dat bij de vast te plakken magnetische montageplaten wordt geleverd (indien van toepassing), is ervoor ontworpen om de beugel permanent aan de monitor/laptop te bevestigen. Als de beugel met behulp van de tape is bevestigd en u vervolgens probeert om de beugel te verwijderen, kan dit leiden tot schade aan zowel de monitor/laptop als de beugel.

Lik niet aan de tape en plaats geen delen van de tape of de magnetische montageplaat in uw mond of op uw lichaam.

Monteer de PCEye 5 niet op monitoren die boven het hoofd of gezicht van een gebruiker zijn geplaatst, tenzij u gebruikmaakt van een speciale oplossing voor vaste montage.

2.2 Epilepsiewaarschuwing



Sommige mensen die lijden aan **fotogevoelige epilepsie** kunnen een epilepsieaanval krijgen of het bewustzijn verliezen bij blootstelling aan bepaalde flikkerlichten of lichtpatronen in het dagelijkse leven. Dit kan zelfs gebeuren als de persoon geen medische voorgeschiedenis van epilepsie heeft of nooit eerder een epilepsieaanval heeft gehad.

Een persoon met fotogevoelige epilepsie heeft gewoonlijk ook problemen bij het kijken naar tv-schermen, sommige arcadegames en flikkerende tl-lampen. Dergelijke personen kunnen een aanval krijgen tijdens het bekijken van bepaalde beelden of patronen op een beeldscherm of zelfs bij blootstelling aan lichtbronnen van een oogbesturingsmodule. Naar schatting 3-5 % van de epilepsiepatiënten lijdt aan deze vorm van fotogevoelige epilepsie. Veel personen met fotogevoelige epilepsie kunnen een "aura" ervaren of vreemde sensaties gewaarworden vóór een aanval. Indien u vreemde gevoelens ervaart tijdens het gebruik, moet u van de oogbesturingsmodule weg kijken.

2.3 Waarschuwing voor infraroodstraling



Wanneer hij is ingeschakeld, zendt de PCEye 5 gepulseerd infraroodlicht (IR-licht) uit. IR-licht en/of -straling kunnen de werking van bepaalde medische apparaten verstoren. Gebruik de PCEye 5 niet in de buurt van dergelijke gevoelige medische apparaten, want dit kan hun nauwkeurigheid of juiste werking verhinderen.

2.4 Waarschuwing voor magnetische velden



De magnetische montagehouder van de PCEye 5 bevat magneten. Magnetische velden kunnen van invloed zijn op de werking van pacemakers en implanteerbare cardioverter-defibrillators. Over het algemeen moet een minimale afstand van 15 cm (6 inch) worden bewaard tussen items met magneten en een hartapparaat.

2.5 Veiligheid voor kinderen



De PCEye 5 is een mechanisch opgebouwd geheel. Het bestaat uit tal van afzonderlijke, aan elkaar gemonteerde onderdelen. In de handen van een kind kunnen bepaalde onderdelen loskomen van het apparaat, met verstikkings- of andere gevaren voor het kind tot gevolg.

Jonge kinderen mogen geen toegang hebben tot het apparaat of het apparaat gebruiken zonder toezicht van een ouder of andere verantwoordelijke volwassene.

2.6 Maak het apparaat niet open



Als u hier niet aan voldoet, vervalt de garantie! Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Neem contact op met Tobii Dynavox Support als uw PCEye 5 niet naar behoren werkt.

2.7 Noodgevallen



Vertrouw niet op het apparaat voor noodoproepen of banktransacties. Het verdient aanbeveling over meerdere communicatiemiddelen te beschikken in noodsituaties. Banktransacties mogen uitsluitend worden uitgevoerd met een systeem dat is aanbevolen door en voldoet aan de normen van uw bank.

2.8 Oogbesturing



Sommige mensen kunnen moe worden (door doelbewust en geconcentreerd de ogen te richten) of zelfs droge ogen krijgen (door minder vaak te knipperen) wanneer ze aan de slag gaan met TD Control. Als u moe wordt of droge ogen krijgt, begin dan langzaam, beperk de duur van uw sessies met TD Control en stop als het niet meer comfortabel aanvoelt. U kunt droge ogen tegengaan met bevochtigende oogdruppels.

2.9 Derden



Tobii Dynavox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de PCEye 5 op een manier die niet overeenkomt met het beoogde gebruik, waaronder elk gebruik van de PCEye 5 met software en/of hardware van derden die het beoogde gebruik wijzigt.

3 Aan de slag met PCEye 5

3.1 Systeemvereisten

Voor PCEye 5 raden we de volgende minimale systeemvereisten aan:

Component	Vereisten
Computer en processor	2.0 gigahertz (GHz) of sneller, Intel Core (i3/i5/i7–6xxx) van de 6de generatie of hoger of een soortgelijke AMD 64 bit-processor. (aanbevolen minimum).
Geheugen (RAM)	8 gigabyte (GB) RAM (aanbevolen minimum).
Vaste schijf	450 megabyte (MB) beschikbaar
USB	USB-C (USB-A via adapter)
Besturingssysteem	Windows 10 (64-bit) RS3 of hoger

4 PCEye 5 bevestigen

4.1 Standaardmontage

Volg deze stappen om de PCEye 5 op een apparaat te monteren:

1. Download het TD Control-softwarepakket via: <https://qrco.de/PCEyeCC>.
Installeer het gedownloade TD Control-softwarepakket.
2. Volg de instructies op het scherm om de PCEye 5 op het paneel van het apparaat te monteren.
3. Klaar!

4.2 De PCEye-beugel gebruiken

Om de PCEye 5 op de PCEye-beugel te monteren, volgt u de installatiegids van de PCEye-beugel.

4.3 Permanente bevestiging


Om de PCEye 5 permanent te bevestigen, zijn er twee (2) M3-schroeven aan de achterkant van de PCEye 5. De C-C-afstand (gemarkeerd met een X) in *Afbeelding 2: C-C-afstand tussen de schroeven van M3, pagina 10* is 155 mm/6,10 inch. De PCEye 5 is compatibel met de GA EyeGaze-beugel van Rehadapt GmbH.



Afbeelding 2: C-C-afstand tussen de schroeven van M3


5 PCEye 5 gebruiken

5.1 De gebruiker positioneren

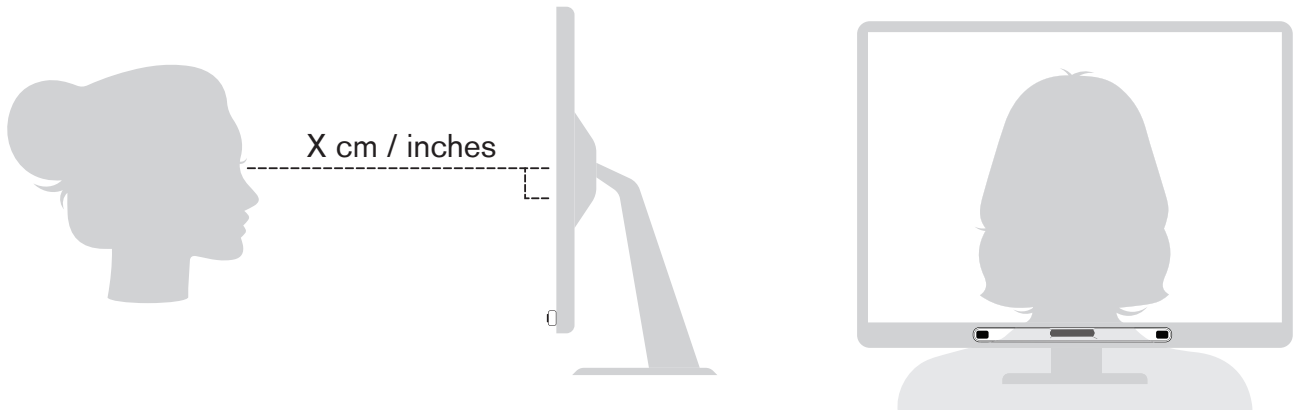

Afbeelding 3: Positionering

De gemonteerde PCEye 5, bevestigd aan de magnetische montageplaat en uw apparaat, is ontworpen voor optimaal gebruik evenwijdig met de ogen van de gebruiker op een afstand van ongeveer 50 — 95 cm (20 to 37 inches), raadpleegt u *Afbeelding 3: Positionering, pagina 11* of *Afbeelding 4: Positionering voor gebruikers die zijwaarts leunen of liggen, pagina 11*.

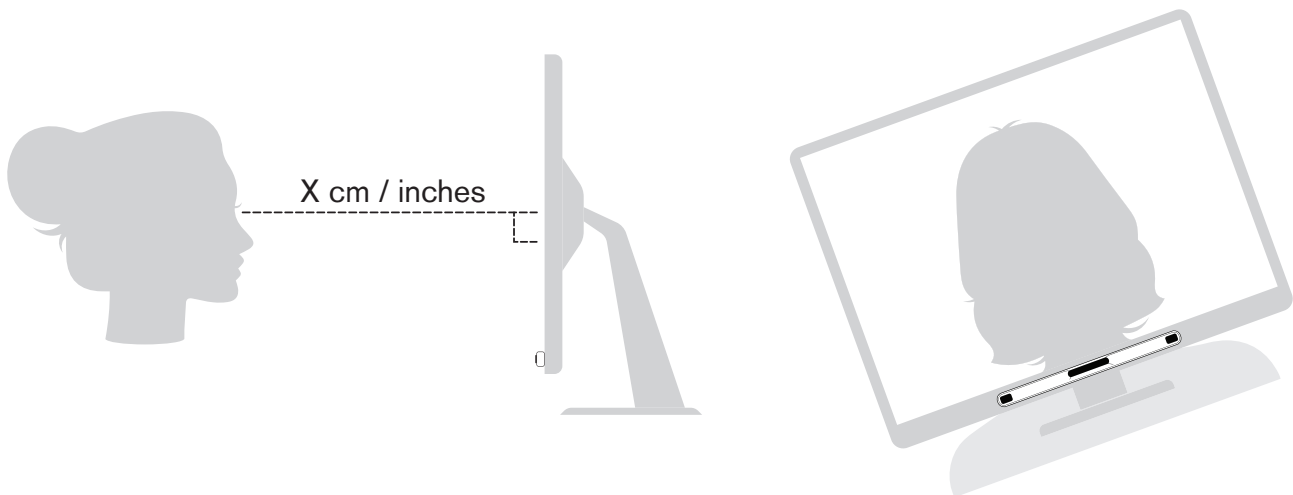

Afbeelding 4: Positionering voor gebruikers die zijwaarts leunen of liggen

Dit betekent dat voor gebruikers die zijwaarts leunen of liggen, de PCEye 5 met monitor en computer ook moet worden gekanteld, zodat de ogen van de gebruiker evenwijdig met en op de juiste afstand van het scherm blijven. Raadpleeg daarvoor *Afbeelding 4: Positionering voor gebruikers die zijwaarts leunen of liggen, pagina 11*.



Zorg ervoor dat de gebruiker zich in een comfortabele houding, in de optimale positie en op de juiste afstand van het apparaat bevindt. Houd er ook rekening mee dat het gebruikerscomfort en de TD Control-prestaties verbeteren als de zon niet direct op het scherm of in de ogen van de gebruiker schijnt.

De optimale afstand tussen een gebruiker en de PCEye 5 gemonteerd op een monitor/laptop verschilt naargelang de grootte van het scherm. De gebruiker moet zich op de optimale afstand bevinden voor de best mogelijke TD Control..

Over het algemeen geldt dat hoe groter het scherm, des te groter de afstand tussen de gebruiker en de oogbesturingsmodule/het scherm voor optimaal gebruik van de TD Control.

Monitoren die groter zijn dan de maximale beperking van de schermgrootte kunnen niet worden gebruikt voor een optimaal gebruik van de TD Control. Raadpleeg *Bijlage C Technische specificaties, pagina 18* voor meer informatie.

5.2 Tips voor gebruik buitenshuis

Hier vindt u enkele tips voor betere prestaties wanneer u de oogbesturingsmodule buitenshuis gebruikt, vooral bij fel zonlicht.

- Het kan nuttig zijn de kalibratie op verschillende momenten van de dag opnieuw uit te voeren als gevolg van veranderingen in de omgeving, zoals veranderend licht of wanneer het apparaat buitenshuis wordt gebruikt.
- Gebruik een baseballpet of iets dergelijks om de zon uit de ogen te houden. Hierdoor worden de prestaties van de oogbesturingsmodule aanzienlijk verbeterd.
- Vermijd direct zonlicht op de oogbesturingsmodule voor de beste prestaties.

6 Instellingen

6.1 Installatie Windows Hello

1. Open het startmenu van **Windows**.
2. Selecteer uw **Account**.
3. Selecteer **Accountinstellingen wijzigen**.
4. Selecteer **Aanmeldingsopties**.
5. Om door te gaan, stelt u een pincode in.
6. Selecteer de knop **Toevoegen** onder de **pincode** en volg de onderstaande stappen.



Noteer de pincode en bewaar deze op een veilige plek.



Als u dit hebt gedaan, worden de opties ontgrendeld om Windows Hello in te stellen.

7. Nadat u een pincode hebt gekozen, kunt u **Instellen** selecteren onder **Windows Hello** en **Gezichtsherkenning**.
8. Als u meer gedetailleerde achtergrondinformatie wilt krijgen over **Windows Hello**, selecteert u **Meer informatie over Windows Hello**. Of selecteer **Aan de slag** om door te gaan.
9. De camera in de oogbesturingsmodule helpt u nu zelf voor het scherm te positioneren door een livestream via de camera weer te geven. Nadat u uzelf voor de camera hebt gepositioneerd, wordt het instellen van de gezichtsherkenning automatisch gestart.
10. Wanneer u het instellen hebt voltooid, wordt de optie **Herkenning verbeteren** beschikbaar gemaakt.



Dit kan erg handig zijn als u een bril draagt, omdat u zonder of met uw bril kunt worden opgenomen.

7 Toepasselijke applicatiesoftware

De PCEye 5 heeft een aantal verschillende toepassingen, afhankelijk van de behoefte van de gebruiker en de geïnstalleerde software.

Ga naar www.tobiidynavox.com voor ondersteuning en documentatie over de compatibele software.

8 Onderhoud van het product

8.1 Temperatuur en vochtigheid

8.1.1 Algemeen gebruik

Het wordt aanbevolen de PCEye 5 in een droge ruimte op kamertemperatuur te bewaren. Het aanbevolen temperatuur- en vochtigheidsbereik voor het apparaat is zoals hieronder vermeld:

- Temperatuur: 10 °C tot 35 °C (50 °F tot 95 °F)
- Vochtigheid: 20% tot 80% (relatieve luchtvochtigheid, geen condensvorming op het apparaat)

8.1.2 Transport en opslag

Het aanbevolen temperatuur- en vochtigheidsbereik voor transport en opslag van het apparaat is zoals hieronder vermeld:

- Temperatuur:
- Vochtigheid: (geen condensvorming op het apparaat)
- Atmosferische druk:

De PCEye 5 is niet waterdicht noch waterbestendig. De PCEye 5 mag niet in een zeer vochtige omgeving of andere natte omstandigheden worden bewaard. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Let op dat u geen vloeistof op het apparaat morst.

8.2 Reiniging

Voordat u het PCEye 5 apparaat reinigt, moet u de aangesloten computer afsluiten en alle kabels loskoppelen. Gebruik een zachte, licht bevochtigde pluisvrije doek. Voorkom het binnendringen van vocht in de openingen van het apparaat. Gebruik geen glasreinigers, allesreinigers, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen om het apparaat te reinigen.

Het wordt aanbevolen het apparaat regelmatig te reinigen.

8.3 Het apparaat vervoeren

Koppel de USB-kabel los en gebruik de draagtas. De PCEye 5 is relatief breekbaar en het filter kan bekrast raken als dit niet voldoende wordt beschermd; neem voorzorgsmaatregelen ter bescherming van het apparaat als dit wordt vervoerd en verpakt

Gebruik de originele doos en verpakkingsmaterialen als het apparaat moet worden vervoerd of verzonden voor reparatie of wanneer u op reis gaat.



Wanneer de PCEye 5 is aangesloten op een monitor/laptop, dienen de aangesloten apparaten niet te worden vervoerd door alleen de PCEye 5 vast te pakken. De PCEye 5 kan het gewicht van de monitor/laptop niet dragen. De apparaten kunnen derhalve losraken en vallen, of kantelen en vallen vanwege een ongelijk verdeeld gewicht, hetgeen leidt tot permanente schade aan beide apparaten. Tobii Dynavox is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade.

8.4 Het apparaat weggooien

Gooi het PCEye 5-apparaat niet weg bij het gewone huishoudelijk of kantoorafval. Volg de plaatselijk geldende voorschriften voor het weggooien van elektrische en elektronische apparaten.

Bijlage A Ondersteuning en garantie

A1 Klantenondersteuning

Neem voor ondersteuning contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger of Tobii Dynavox Support. Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen, is het belangrijk dat u toegang hebt tot uw PCEye 5 en indien mogelijk tot een internetverbinding. Zorg dat u het serienummer van het apparaat paraat hebt. Dit bevindt zich op de achterkant van het apparaat. Onze ondersteuningspagina's vindt u online op: www.tobiidynavox.com of www.myTobiiDynavox.com.

A2 Garantie

Lees de garantie hier: <https://www.tobiidynavox.com/pages/warranties>.



Tobii Dynavox garandeert niet dat de software op de PCEye 5 aan uw eisen voldoet, dat de werking van de software ononderbroken of vrij van fouten is of dat alle softwarefouten worden gecorrigeerd.



Tobii Dynavox garandeert niet dat de PCEye 5 aan de eisen van de klant voldoet, dat de werking van de PCEye 5 ononderbroken is of dat de PCEye 5 vrij van fouten of andere defecten is. De klant erkent dat de PCEye 5 niet werkt bij alle personen en onder alle lichtomstandigheden.



Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. De garantie geldt alleen als het apparaat volgens de gebruikershandleiding wordt gebruikt. Als u het PCEye 5-apparaat opent/demonteert, vervalt de garantie.



Het wordt aanbevolen om de originele verpakkingsmaterialen voor de PCEye 5 te bewaren.

Als het apparaat naar Tobii Dynavox moet worden teruggestuurd voor problemen of reparaties die onder de garantie vallen, wordt het aanbevolen de oorspronkelijke verpakking (of gelijkwaardig) bij de verzending te gebruiken. De meeste transporteurs vereisen ten minste 5 cm (2 inch) verpakkingsmateriaal rond het apparaat.

Opmerking: Als gevolg van de regelgeving van de in Amerika gevestigde organisatie Joint Commission moeten alle verpakkingsmaterialen, zoals dozen, die naar Tobii Dynavox zijn verzonden, worden weggegooid.

Bijlage B Conformiteitsinformatie



Het PCEye 5 beschikt over een CE-keurmerk, hetgeen aangeeft dat het voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsvereisten van Europese richtlijnen.

B1 FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, ook interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.



Aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Tobii Dynavox kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken conform de FCC-voorschriften.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen te bieden in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, kan deze schadelijke interferentie in de radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur toch schadelijke interferentie veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer in te schakelen, dient de gebruiker de interferentie te verhelpen met één of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne anders of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur voor hulp.

B2 Industry Canada-verklaring

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

B3 CE-verklaring

De PCEye 5 voldoet aan de volgende normen:

- 2017/745 (MDR) Medical Device Regulation
- 2011/65/EU (RoHS) - Restriction of Hazardous Substances Directive
- 2014/30/EU (EMC) - Electromagnetic Compatibility Directive

B4 Normen

De PCEye 5 voldoet aan de volgende normen:

- FCC part 15, Class B
- ICES-003 Issue 6:2016 Class B
- EN 55032: 2012+AC: 2013 Class B
- EN 55024:2010+A1:2015
- EN 61000-3-2: 2014
- EN 61000-3-3: 2013
- AS/NZS CISPR 32:2015

Bijlage C Technische specificaties

Technische specificaties	PCEye 5
Verwerkingseenheid	Verwerkingseenheid Tobii EyeChip™ met volledig ingesloten verwerking
Interface	USB Type C-connector
Werkafstand	45 — 95 cm 20 — 37 inch
Schermgrootte ¹ Bij een gebruikersafstand van 65 cm (25,6 inch)	Maximaal 27" aanbevolen
Bewegingsvrijheid van hoofd ² (breedte x hoogte)	~20 × 20 cm (7,9 × 7,9 inch) bij 50 cm vanaf scherm ~35 × 35 cm (13,8 × 13,8 inch) between 65 – 80 cm vanaf scherm
Positionering Afstand (tot het scherm) Grootte van trackbox (breedte × hoogte) Diepte van trackbox	45 - 95 cm (20 - 37 inch) 20 × 20 - 35 × 35 cm (7,9 × 7,9 - 13,8 × 13,8 inch) 50 cm (19,7 inch)
Datasnelheid blik	33 Hz
Samplesnelheid blik	133 Hz
Techniek voor oogbesturing	Videogebaseerde oogbesturing met pupil- en hoornvliesreflectie met donkere en heldere pupilverlichting.
Buitengebruik mogelijk	Ja
Gebruikerskalibratie (voorheen Tracking-robustheid)	>98%
Kijkrichting detecteren Interactie >30 Hz	98% voor 95% van populatie ³
Blikprecisie Voor 95% van populatie ⁴	<1,58 graden
Precisie van kijkrichting Voor 95% van populatie ⁴	<0,2°
Max. hoofdbewegingssnelheid Oogpositie Blikgegevens	40 cm/s 10 cm/s
Max. draaiing, schuinstand	25°
Max. slinger, pitch	25°
Datastroom en datasnelheid Blikvertraging Blikherstel	17 ms 0 ms
Montage	Ingebouwd
Voeding	Ingebouwd
Apparaatgrootte (lengte x hoogte x diepte)	285 mm × 15 mm × 8.2 mm 11,22 inch × 0,59 inch × 0,32 inch
Gewicht apparaat	93 g 3,3 oz

Technische specificaties	PCEye 5
	1. Als het scherm groter is dan aanbevolen, is de kwaliteit van de kijknauwkeurigheid in de bovenhoeken van het scherm beperkt wanneer de gebruiker dicht bij het scherm zit. 2. Bewegingsvrijheid van het hoofd duidt op het volume voor de besturingsmodule waar zich ten minste één oog van de gebruiker moet bevinden. De cijfers worden evenwijdig/orthogonaal ten opzichte van het schermoppervlak weergegeven. 3. De testgroep sloot degenen uit die een correctiebril met een dioptrie van +5,00 of hoger zouden dragen of die aan een oogziekte leden. 4. De mate van nauwkeurigheid en precisie ten opzichte van het percentage van de populatie is afgeleid van uitgebreide tests bij representatieve personen uit de gehele populatie. We hebben gebruikgemaakt van honderdduizenden diagnostische beelden en hebben tests uitgevoerd bij ongeveer 800 personen met verschillen in aandoening, zicht, etniciteit, dagelijkse hoeveelheid stof, vegen of vlekken rond hun ogen, met wazig zicht, enzovoort. Dit heeft geleid tot een robuustere en hoogwaardigere eyetracking-beleving en een veel realistischere weergave van de feitelijke prestaties in de gehele populatie, niet alleen in een wiskundig 'ideaal' scenario. De 'ideale' cijfers zijn de eerdere meetnorm voor nauwkeurigheid en precisie, zowel voorheen gebruikt door Tobii als momenteel gebruikt door alle eyetracking-concurrenten. Hoewel 'ideale' cijfers nuttig zijn om een algemeen idee te krijgen van vergelijkende kwaliteit en prestaties, kunnen ze niet worden toegepast op gebruik in de echte wereld zoals de kwantitatieve mate van nauwkeurigheid en precisie ten opzichte van het percentage van de populatie op basis van uitgebreide tests bij representatieve personen uit de gehele populatie.

Copyright © Dynavox Group AB (Publ). Niet alle producten en diensten worden op elke lokale markt aangeboden. Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Alle handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren.

Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox-apparaat

Online help

Raadpleeg de productspecifieke supportpagina voor uw Tobii Dynavox-apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product. Onze ondersteuningspagina's vindt u online op: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Neem contact op met uw productadviseur of wederverkoper

Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox-productadviseur of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactgegevens naar <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.