


Notandahandbók

TD Snap®

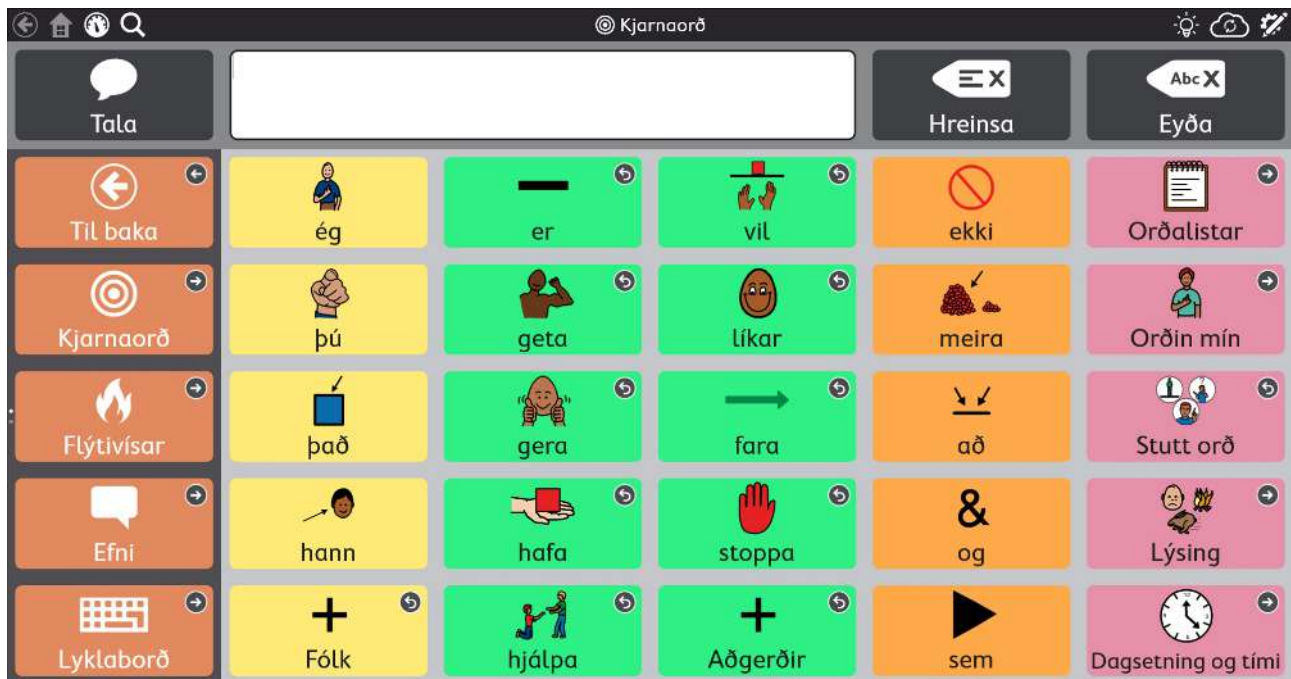

Notandahandbók

Útgáfa 1.37

2025-07-29

Allur réttur áskilinn.

Höfundarréttur © Dynavox Group AB (publ)

Ekki má afrita nokkurn hluta af þessu skjali, geyma það í endurheimtakerfi, eða senda í nokkru formi, með nokkrum leiðum (rafrænum, ljósritun, upptöku eða á annan hátt) án þess að vera með skriflegt leyfi frá útgefanda.

Höfundarréttarvernd nær yfir öll form og efni höfundarréttarvarinna efna og upplýsinga sem gildandi lög leyfa eða eiga eftir að leyfa, þ.m.t. án takmarka, efni sem kemur frá hugbúnaðinum sem sést á skjánum svo sem skjámyndir, valmyndir o.s.frv.

Upplýsingarnar í þessu skjali eru í eigu Dynavox Group AB. Hverskonar endurgerð að hluta eða í heilu lagi án fyrra skriflegs samþykkis Dynavox Group AB er óleyfileg.

Vörur sem er vísað til í þessu skjali geta verið annað hvort vörumerki og/eða skráð vörumerki viðkomandi eigenda. Útgefandi og höfundur gera ekki tilkall til þessara vörumerkja.

Þó að allrar varfærni hafi verið gætt við undirbúning þessa skjals, taka útgefandi og höfundur enga ábyrgð á villum eða yfirsjónum, eða á tjóni sem verður til af notkun upplýsinga í þessu skjali eða af notkun forrita eða forritunarkóða sem gæti fylgt með því. Útgefandi og höfundur bera enga skaðabótaskyldu vegna tapaðs hagnaðar, eða nokkurs annars viðskiptalegs taps sem orsakast af eða er talið hafa orsakast beint eða óbeint af þessu skjali.

Efni getur breyst án fyrirvara.

Athugaðu heimasíðu Tobii Dynavox.

www.TobiiDynavox.com fyrir uppfærðar útgáfur af þessu skjali.

Tengiliðaupplýsingar:

Dynavox Group AB
Löjtnantsgatan 25
115 50 Stockholm
Svíþjóð

+46 8 522 950 20

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
Bretland

+44 (0)114 481 00 11

Tobii Dynavox (Suzhou) Co. Ltd
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP,
Suzhou
P.R.China 215021

+86 512 69362880



Efnisyfirlit

1	Velkomin.....	9
1.1	Kerfiskröfur.....	9
1.2	Studd tungumál	10
1.3	Hvar er hægt að fá TD Snap®	10
1.3.1	Kaupa taleiginleika	10
2	Kennsluleiðbeiningar og stuðningur	11
2.1	Tobii Dynavox Pathways fyrir Core First.....	11
2.2	Kennsluleiðbeiningar og stuðningur á vefnum	11
2.3	myTobiiDynavox	11
2.4	Learning Hub	11
3	Að byrja	12
3.1	Setja upp nýjan notanda	12
3.2	Endurheimta núverandi notanda	12
3.3	Veldu síðuset	12
3.3.1	Core First	12
3.3.2	Motor Plan Síðuset*	13
3.3.3	Core First skönnunarsíðuset*	13
3.3.4	Textasíðuset*	13
3.3.5	Málstol síðuset*	14
3.3.6	Express síðuset*	14
3.4	Veldu rúðustærð	14
4	Yfirlit	15
4.1	Augnstýring og skjáborðsaðgangur	15
5	Efsta stika.....	16
5.1	Til baka	16
5.2	Heima.....	16
5.3	Stjórnborð	16
5.4	Leita	16
5.5	Félagsgluggavísir	17
5.6	Orðaforðasía	17
5.7	Gagnarakning	18
5.8	Samstillta	18
5.9	Breyta.....	18
6	Skilaboðaslá.....	19
6.1	Tala	19
6.2	Skilaboðagluggi.....	19
6.2.1	Breyta texta í skilaboðaglugga	19
6.3	Hreinsa.....	20
6.4	Eyða.....	20

6.5	Afturkalla	20
6.6	Endurgera	21
6.7	Spjall	21
6.8	Afrita á hnapp.....	21
6.9	Deila	21
6.10	Gera hlé á aðgangsaðferð	22
6.11	Víxlhnappur Orðaforðasíu (eingöngu Motor Plan síðuset).....	22
7	Tækjastikan	23
7.1	Til baka	23
7.2	Kjarnaorð	23
7.3	Flýtvísar.....	24
7.4	Efni	24
	7.4.1 Efnisorð	24
	7.4.2 Stuðningur	24
7.5	Lyklaborð	26
7.6	Stjórnborð	26
7.7	Orðaform	26
7.8	Studd leiðsögn	27
7.9	Núverandi Boardmaker athöfn	27
7.10	abc (aðeins þýska).....	27
8	Orðaforðasía	28
8.1	Kveikt eða slökkt á orðaforðasíu	28
8.2	Breyta orðforðalista	28
8.3	Veldu orðforðalista	29
8.4	Búa til nýjan orðaforðalista	29
8.5	Flytja inn orðalista (.txt skrá)	30
8.6	Deila orðforðalista	30
8.7	Endurnefna, afrita eða eyða orðaforðalista	30
9	Breytingar.....	31
9.1	Breytingasvæði	31
9.2	Bæta við hnappi	31
9.3	Færa hnapp	32
9.4	Breyta stærð hnapps.....	32
9.5	Hnappabreytingaverkfæri.....	34
	9.5.1 Afturkalla og endurgera	35
	9.5.2 Afrita og líma hnapp	35
	9.5.3 Velja alla hnappa.....	35
	9.5.4 Velja marga hnappa	35
	9.5.5 Renningsval	36
	9.5.6 Fela/sýna hnapp.....	36
	9.5.7 Raða hnöppum í stafrófsröð.....	37
	9.5.8 Eyða hnappi	37
	9.5.9 Víkka / fella saman breytingaverkfæri nöfn	37


9.6	Hnappa efni.....	38
9.6.1	Merki hnapps.....	38
9.6.2	Virkt efni	38
9.6.3	Skilaboð hnapps.....	40
9.6.4	Hljóðmerki hnapps	41
9.6.5	Mynd hnapps.....	42
9.6.6	Breyta tákni	44
9.6.7	Hnappagerðir	46
9.7	Aðgerðir hnapps.....	47
9.7.1	Eyða aðgerð.....	51
9.7.2	Endurraða aðgerðum hnapps	51
9.7.3	Veftafla	51
9.7.4	AccessIT	52
9.7.5	Spila Boardmaker athafnir í TD Snap®.....	54
9.7.6	Ræsa Apple flytleiðir úr TD Snap® (aðeins fyrir iPadOS).....	58
9.7.7	Spila YouTube myndbönd í TD Snap®.....	58
9.8	Stíll hnapps	59
9.8.1	Bakgrunnur hnapps.....	60
9.8.2	Rammi hnapps	60
9.8.3	Merki hnapps.....	60
9.8.4	Uppsetning hnappa	61
9.8.5	Sjónrænn hnappahlekkur	62
9.9	Tengja á síðu / búa til nýja síðu	63
9.9.1	Búðu til tengla hnapp í tómu hólfi.....	63
9.9.2	Búa til tengil þar sem hnappur er þegar til	63
9.9.3	Tengja á nýja síðu / búa til nýja síðu.....	64
9.9.4	Tengja á síðu sem er til.....	64
9.9.5	Tengja á nýtt afrit af síðu sem er til	64
9.9.6	Flytja inn og tengja á síðu	64
9.9.7	Heimsækja síðu	65
9.10	Stillingar fyrir hnapp aðgangsaðferða	66
9.11	Málareglur hnapps	66
9.12	Viðskeyti og forskeyti	66
9.13	Breyta stuðningi	67
9.14	Fjarstýringar	67
9.14.1	Forritun fjarstýringarhnapps	67
9.14.2	Notkun fjarstýringa	68
9.15	Breyta síðu.....	68
9.15.1	Nafn síðu.....	68
9.15.2	Tákn síðu	69
9.15.3	Stillingar málareglna.....	71
9.15.4	Rúðustærð síðu.....	71
9.15.5	Bakgrunnslitur síðu	72
9.15.6	Sýna/fela skilaboðaslá.	72
9.15.7	Eyða síðu	72
9.15.8	Flytja inn/út síður.....	73
9.16	Skannaðir hópar.....	73
9.16.1	Valkostir skannaðs hóps	74
9.17	Breyta skilaboðaslá.....	74
9.17.1	Færðu til og breyttu stærð hluta í skilaboðaslá	74
9.17.2	Bæta við hnöppum í skilaboðaslánna	75
9.17.3	Fjarlægja hnappa úr skilaboðaslá	75

9.18	Breyta verkfærastiku	76
9.19	Sérsniðnir litir	76
10	Stillingar síðusetts	78
10.1	Síðusett	78
10.1.1	Veldu síðusett	78
10.1.2	Búa til nýtt síðusett	78
10.1.3	Endurnefna síðusett og breyta lýsingu	78
10.1.4	Eyða síðusetti	79
10.1.5	Stilla heimasíðu	79
10.1.6	Stilla inn lyklaborðssíðu	79
10.2	Rúðustærð	79
10.3	Stíll síðusetts	80
10.3.1	Húðlitur og hárlitur tákns	80
10.3.2	Leturgerð merki hnappa síðusetts	81
10.3.3	Stærð leturgerðar merki hnappa síðusetts	81
10.3.4	Feitletruð merki hnappa síðusetts	81
10.3.5	Uppsetning hnappa síðusetts	81
10.3.6	Útlit tengla síðusetts	82
10.3.7	Rúðujafar síðusetts	83
10.3.8	Sjálfvaldir bakgrunnslitir síðusetts	83
10.3.9	Leturgerð skilaboðaglugga síðusetts	83
10.3.10	Stærð leturgerðar skilaboðaglugga síðusetts	83
10.3.11	Litur texta skilaboðaglugga síðusetts	84
10.3.12	Bakgrunnslitur texta skilaboðaglugga síðusetts	84
10.3.13	Auðkennislitur texta skilaboðaglugga síðusetts	84
10.3.14	Bakgrunnslitur texta skilaboðaslár síðusetts	84
10.3.15	Stíll fletthnapps	84
10.4	Kjörstillingar síðusetts	85
10.5	Aðlögunarhnappar	85
10.6	Um síðusett	86
10.6.1	Stillingar efnishönnuða síðusetts	86
11	Prenta	88
12	Google Assistant	89
12.1	Tengdu Google aðganginn þinn	89
12.2	Setja upp Google tækið þitt	89
12.3	Tungumálastuðningur Google Assistant	89
12.4	Tala við Google Assistant	90
13	Deila og vista	92
13.1	Notendur	92
13.2	Síðusett	92
13.2.1	Flytja inn síðusett	92
13.2.2	Vista afrit af síðusetti	93
13.2.3	Deila afriti af síðusetti (í gegnum myTobiiDynavox)	93
13.2.4	Samstillta síðusett	94
13.3	Síðubúnt	96
13.3.1	Flytja út síðubúnt	97
13.3.2	Flytja inn síðubúnt	98

14	Notandastillingar	99
14.1	Breyta notanda.....	99
14.2	Búa til nýjan notanda	99
14.3	Taka öryggisafrit af notanda	99
14.4	Endurheimta notanda.....	100
14.5	Breyta/Endurnefna notanda	101
14.6	Eyða notanda.....	102
14.7	Innskráning á myTobiiDynavox reikning	102
14.8	Rödd	102
14.8.1	Talrödd	102
14.8.2	Raddtíðni.....	104
14.8.3	Tónhæð raddar	104
14.8.4	Undantekningar í framburði.....	104
14.9	Úttakstæki tals	105
14.10	Tungumála-sértækar raddir	106
14.11	Google aðgangur	106
14.12	Kjörstillingar notanda	106
14.12.1	Talstillingar	106
14.12.2	Stillingar skilaboðaglugga	106
14.12.3	Spástillingar.....	107
14.12.4	Endurstilla orðaspá	107
14.12.5	Stillingar samstillingar	107
14.13	Aðgangsaðferð.....	108
14.13.1	Sjá aðgangsaðferð	108
14.13.2	Snerti valkostur	108
14.13.3	Halda við valkostur.....	109
14.13.4	Snerta út valkostur	110
14.13.5	Valmöguleikar fyrir hljóðræna snertingu.....	111
14.13.6	Músadvöl valkostir.....	112
14.13.7	Stillingar augnstýringar.....	113
14.13.8	Skönnunar valmöguleikar.....	114
14.14	Gagnarakning	117
14.14.1	Vöktun hnappanotkunar	117
14.14.2	Sýna hnappa á efstu stiku	118
14.14.3	Sýna hnappanotkunartalningu	118
14.14.4	Sýna sýningartalningu.....	119
14.14.5	Stjórna gögnum	119
15	Kerfisstillingar	121
15.1	Kjörstillingar	121
15.1.1	Aðgangskóði	121
15.1.2	Skjástillingar (aðeins fyrir Windows)	122
15.1.3	Breytingarstilling tungumáls	122
15.2	Tæki.....	122
15.2.1	Stillingar félagsgluggavísis.....	122
15.3	Búð.....	122
15.3.1	Gerðu kaup (aðeins iPadOS).....	122
15.3.2	Endurheimta innkaup (Aðeins Windows)	123
15.3.3	Afvirkja lykil (Aðeins Windows)	123
15.4	Táknasett	123

15.4.1	Leitarstillingar	123
15.4.2	Uppsett og niðurhalanleg tákni	123
15.4.3	Endurraða táknasettum	124
15.5	Hjálp og leiðbeiningar	124
15.5.1	Myndbönd	124
15.5.2	Pathways fyrir Core First	124
15.5.3	Snögg yfirferð	124
15.5.4	Ytri hjálp	124
15.6	Um	124
15.6.1	Senda endurgjöf	124
15.6.2	Hugbúnaðaruppfærslur	125

1 Velkomin

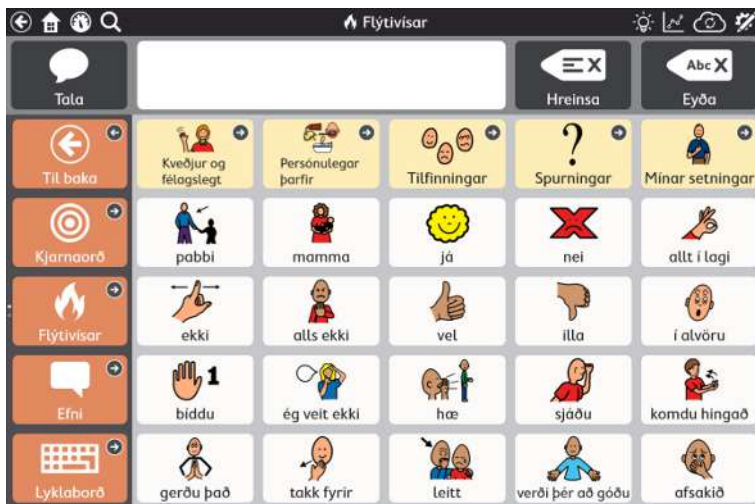

Skýringamynd 1: Snap Core First — QuickFires

TD Snap® er öflugur tjáskiptahugbúnaður sem byggir á táknum fyrir þá sem tala ekki eða þurfa stuðning við talað mál. Tjáskiptabúnaðurinn er hannaður til að vera auðveldur í notkun, gæddur innsæi og er lausn sem fánleg er á markaði bæði fyrir notanda og tjáskiptafélaga. TD Snap® er ákjósanleg lausn fyrir einstaklinga með einhverfu, heilalömun, Downs einkenni, greindarskerðingu og málstol. Með TD Snap®, veitum við bestu mögulegu tjáskiptareynsluna byggða á táknum ásamt nauðsynlegum þáttum fyrir foreldri, kennara eða meðferðaraðila til að vinna með notendum og hjálpa þeim að öðlast árangursrík tjáskipti.

1.1 Kerfiskröfur

Tafla 1: Windows stýrikerfi

	Stýrikerfi	Arkitektúr	Minni	Snerting	Myndavél
Lágmarks	Windows 10 útgáfa 1803	x64	2 GB	Ekki nauðsynlegt	Ekki nauðsynlegt
Ráðlagt	Windows 10 útgáfa 20H2	x64	4 GB	Sambætt snerting	Sambætt myndavél

Tafla 2: iPadOS

	Stýrikerfi	Tæki	Afkastageta	Snerting	Myndavél
Lágmarks	iPadOS 13	iPad Air 2 iPad Mini 4	32 GB	Sambætt snerting	Ekki nauðsynlegt
Ráðlagt	iPadOS 17	iPad 8nda kynslóð	64 GB	Sambætt snerting	Sambætt myndavél

1.2 Studd tungumál

- Arabic (SA)
- Chinese (Simplified)
- Czech (CZ)
- Danish (DK)
- Dutch (NL)
- English (AU)
- English (CA)
- English (UK)
- English (US)
- Finnish (FI)
- French (CA)
- French (FR)
- German (DE)
- German (Switzerland)
- Hebrew (IL)
- Icelandic (IS)
- Italian (IT)
- Japanese (JP)
- Norwegian (NO)
- Polish (PL)
- Portuguese (BR)
- Portuguese (PT)
- Spanish (ES)
- Spanish (Latin America)
- Spanish (US)
- Swedish (SE)
- Turkish (TR)

1.3 Hvar er hægt að fá TD Snap®

TD Snap® er fáanlegt í Apple App Store fyrir iPad og myTobiiDynavox.com fyrir Windows tæki. TD Snap® kemur foruppsett á Tobii Dynavox taltækjum.

Talvirkni í TD Snap® fylgir með Tobii Dynavox taltækjum. Þegar er verið að setja upp TD Snap® á tæki sem ekki er framleitt af Tobii Dynavox, allir eiginleikar sem ekki eru talmál eru fáanlegir ókeypis, þar á meðal sumt efni, að búa til og breyta síðum, búa til notendur og afrita, endurheimta og samstillja; þó er talvirkni takmörkuð. Heildar talvirkni er tiltæk sem kaup.

Talvirkni sem er *óvirk* í ókeypis útgáfu forritsins:

- Tala skilaboðaglugga
- Hverskonar tal eða upptökuúttak sem kemur frá hnappavirkni
- Hverskonar tal eða upptökuúttak sem kemur frá hegðunarstuðningi
- Hljóðmerki

Talvirkni sem er *tiltækt* í ókeypis útgáfu forritsins:

- Hljóðupptaka (í breytingarham)
- Forskoðun hljóðupptöku (í breytingarham)
- Raddforskoðun
- Forskoðun undantekningar í framburði (í breytingarham)

1.3.1 Kaupa taleiginleika

iPadOS - í TD Snap® fara í Edit > System > Store að kaupa tal eiginleika fyrir TD Snap® í gegnum Apple App Store.

Windows - Hringdu Tobii Dynavox í þjónustudeild fyrirtækisins til að kaupa tal eiginleika TD Snap®. <https://www.tobiidynavox.com/pages/locations>

2 Kennsluleiðbeiningar og stuðningur

Tobii Dynavox býður upp á úrval ókeypis kennsluleiðbeininga til að styðja og bæta við reynslu þína af TD Snap®. Ekki missa af þessum verkfærum sem munu hjálpa þér að fá sem mest út úr Tobii Dynavox hugbúnaðinum þínum!

2.1 Tobii Dynavox Pathways fyrir Core First



Pathways fyrir Core First eru ókeypis kennsluleiðbeiningar sem hjálpar þér að innleiða Tobii Dynavox vörur á áhrifaríkasta og skilvirkasta hátt. Þú lærir á þetta rannsóknadrifna tæki sem hámarkar þátttöku, auðveldar notkun og margt fleira.

Pathways fyrir Core First leiðir þig áfram þegar þú byrjar að nota TD Snap®. Core First og hvetur til vaxtar í þátttöku, tungumáli og læsi. Pathways fyrir Core First mun:

- gefa skýra, sérsníðna leið til að byrja.
- hvetja til vaxtar einstaklinga á hvaða aldri og kunnáttustigi sem er.
- kenna þér að byggja upp kunnáttu á ýmsum sviðum, þ.m.t. notkun á kjarnaorðum, að bæta við orðaforðann, að nota TD Snap®. Core First við daglegar athafnir og fleira.
- sýna þér hvernig TD Snap® Core First getur hjálpað til við félagslega hæfni og aðstæður, svo sem hvernig á að meðhöndla áföll í tjáskiptum, leiðsögn og notkunarkunnáttu og hvetja til jákvæðrar hegðunar.
- byggja upp kunnáttu tjáskiptafélaga með helstu ábendingum.
- Styðja yfirstandandi sérsnið á Core First.

Heildarútgáfa eiginleika Pathways fyrir Core First er tiltæk sem [ókeypis forrit](#) fyrir Windows og iPadOS. Pathways fyrir Core First Lite er tiltæk á netinu í gegnum netvafra þinn. Heimsækið <https://www.tobiidynavox.com/products/pathways-for-core-first?tab=1> fyrir frekari upplýsingar.

2.2 Kennsluleiðbeiningar og stuðningur á vefnum

Ef frekari aðstoðar er þörf mælum við með að byrja á Training & Support síðunni á heimasíðu Tobii Dynavox.

2.3 myTobiiDynavox

myTobiiDynavox er persónuleg geymsluvefsíða þín og deiligátt. Hladdu upp notanda öryggisafritaskrá þínum til myTobiiDynavox til varðveislu og til að deila með öllu tjáskiptastuðningsteymi þínu.

Farðu á myTobiiDynavox.com til að skrá þig fyrir ókeypis reikningi.

2.4 Learning Hub



Learning Hub er, eins og er, eingöngu á ensku.

Farðu á learn.tobiidynavox.com fyrir skýrslur, þjálfun og annað kennsluefni, þ.m.t.:

- svör við algengum spurningum
- þjálfunarmyndbönd
- myndbandsupptökur af vefnámskeiðum
- vefnámskeið

3 Að byrja

Þegar þú ræsir TD Snap® í fyrsta skipti verður þú spurð/ur nokkurra spurninga til að hjálpa til við að sérsníða hugbúnaðinn að þínum þörfum. Þú getur breytt þessum stillingum síðar ef þú vilt.

3.1 Setja upp nýjan notanda

Veldu **Byrja** og við verðum búin að setja forritið upp á innan við mínútu!

3.2 Endurheimta núverandi notanda

Notaðu þennan valkost ef þú ert þegar með öryggisafritsskrá fyrir notanda sem þú vilt endurheimta.

Endurheimta notandaöryggisafrit frá myTobiiDynavox

1. Veldu **Endurheimta**.
2. Þú ert ekki skráð/ur inn á myTobiiDynavox, settu inn netfangið þitt og aðgangsorð og veldu síðan **Næst**.
3. Veldu notandaöryggisafritaskrá úr listanum og veldu síðan **Næst**.

Endurheimta notandaöryggisafrit frá staðbundinni skrá


1. Veldu **Endurheimta**.
2. Veldu **Endurheimta frá staðbundinni skrá**.
3. Vafraðu og veldu notandaöryggisafritaskrá og veldu síðan **Opna**.

3.3 Veldu síðuset

Uppsetningarleiðsögnin sýnir sjálfkrafa þau síðuset sem passa við tungumálastillingar tækisins, ef það er tiltækt í TD Snap®. Veldu **tungumál** til að sjá síðuset sem eru tiltæk á öðrum tungumálum.

3.3.1 Core First

Core First er aðalsíðusettið sem er tiltækt í TD Snap® hugbúnaðinum. Það er hannað til að hámarka þátttöku, læsi og vöxt í gegnum hin ýmsu tjáskiptaverkfæri sem eru notuð saman á sveigjanlegan og fyrirsjáanlegan hátt.

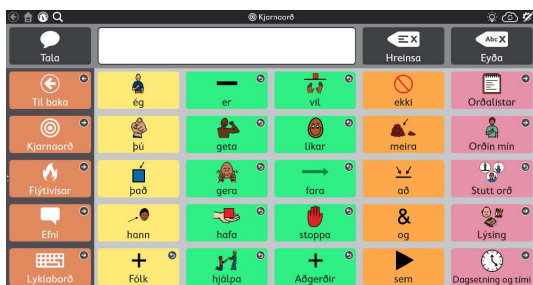

Skýringamynd 2: Core First síðuset

Aðalsmerki Core First er kjarnaorðatækni. Rannsóknir, klínísk upplifun og notendaprófanir voru notaðar til að finna:

- Orðaval fyrir hámarksnotkun á mörgum sviðum.
- Orðastaðsetning og notandaviðmót
- Röðun orðainnleiðingar.
- Stöðug staðsetning orða á meðan öðrum er kerfisbundið bætt við.
- Skilvirkni leiðsagnar.
- Stuðningur til að kenna notendum merkingu orða og hvernig á að sameina þau til að búa til einkvæm skilaboð.

Frekari tjáskiptaverkfæri innifalin í Core First eru meðal annars:

- Flytvisar — hröð, fyrirsjáanleg skilaboð sem hægt er nota ein eða með öðrum orðum.
- Lyklaborð — settu stafi inn í skilaboðagluggann til að búa til eða breyta orðum.
- Orðalistar — skipulagðir eftir flokkum svo auðvelt er að finna þá.
- Efni — styður tjáskipti í sérstökum aðstæðum eða í kringum ákveðið efni.

- Stuðningur — hjálpar notendum með hegðun og félagsleg samskipti.
- Stjórnborð — fjarstýringar, hljóðstyrksstýring og fleira innan seilingar!

Core First síðusettið er hannað til að vera fyrirmynd í tjáskiptum með hjálp (TST) efni, sem gefur notendum aðgengilegustu upplifunina við að finna efni hratt og hafa hámarks getu til að búa til einstök og sérstök skilaboð. Core First gerir notendum kleift að taka þátt í hröðum, rauntímatjáskiptum um efni sem eru þeim mikilvægust. Það gefur þeim kost á að búa til ný skilaboð sem væri erfitt að spá fyrir um fyrirfram. Með því að fara í gegnum verkfærin sem eru til staðar, geta tjáskiptatækni notendur verið virkir þátttakendur í aðstæðum og átt í tjáskiptum við tjáskiptafélaga sína.

Þróun læsis er mikilvæg hæfni sem þarf að vera hluti af tjáskiptalausninni. Með notkun lyklaborða, auðveldra tengla við rannsóknarprófuð forrit á tækinu og efni sem hannað er til að styðja við tjáskipti í kringum lestrarupplifun styður Core First læsisþróun fyrir alla notendur sína.

Að lokum er Core First ekki ætlað sem ein-stærð-hentar-öllum eða skorðað kerfi. Samfeldni yfir rúðustærðir er helsta leiðarstefið. Um leið og kunnáttu notenda vex er hægt er að bæta við frekari valkostum fyrir flóknara tungumál. Þessum nýju valkostum er bætt við Core First án vandkvæða og efnið helst á fyrirsjáanlegum stöðum.

3.3.2 Motor Plan Síðuset*

TD Snap Motor Plan síðusetið leggur áherslu á málþroska og skapandi málframleiðslu (segðu hvað þú vilt segja, eins og þú vilt orða það). Notendur læra sérstakt tungumálamynstur sem tengist hverju orði, sem leiðir til sjálfvirkni með tímanum. Þetta gerir notendum kleift að einbeita sér að vitrænni viðleitni að tungumáli og samskiptum, ekki hugbúnaðarleiðsögn. Orðaforðasiutólið gerir leiðbeinendum kleift að miða á ákveðin orð eða stækka orðaforðann stígvaxandi. Öll Motor Plan síðuset bjóða upp á sama fjölda orða (u.þ.b. 2.700).



Skýringamynd 3: Heimasíða Motor Plan 30 síðusets.

Tvær meginreglur Motor Plan síðusetsins eru samræmi og skilvirkni.

Samræmi

- Byrjaðu alltaf frá heimasíðunni og farðu sjálfkrafa heim eftir val.
- Orð eru áfram á sama stað og birtast aðeins einu sinni í síðusetinu.

Skilvirkni

- Öll 2.700 orðin eru innan við 3 snertingar eða minna.†
- Algengustu orðin eru nálægt heimasíðunni.

Stærðarvalkostir síðusetsins eru mismunandi eftir tungumálum: 30 staða (5x6), 40 staða (5x7), og 66 staða (6x11)

* Ekki tiltækt í öllum tungumálum.

† Val á orðaforða krefst að meðaltali 2,3 snertinga á 30-stöðu Motor Plan síðusetinu og 2,0 snertinga á 66-stöðu Motor Plan síðusetinu.

3.3.3 Core First skönnunarsíðuset*

Í þessu síðuseti hefur Core First efnið verið endurhannað til að auka þægindi og skilvirkni með skönnunar aðgangsaðferðinni. Það felur í sér að skanna síður til að hjálpa notendum að venjast að nota skönnunar aðgangsaðferðina.

Síðuset, rúðustærðir: 3X4, 6x4, 7x6, 9x8

* Ekki tiltækt í öllum tungumálum.

3.3.4 Textasíðuset*

Þetta síðuset er hannað fyrir notendur sem reiða sig ekki á tákn fyrir tjáskipti. Mælt er með þessu textasíðuseti fyrir notendur tjáskiptatækni með góða lestrar- og samsetningarkunnáttu.

Síðuset, rúðustærðir: 7x10

* Ekki tiltækt í öllum tungumálum.

3.3.5 Málstol síðuset*

Aphasia textasíðusettið er hannað fyrir notendur með Aphasia. Eiginleikar sem fylgja eru veftafla, efnissíður með rúðum eða sjónrænum senu uppsetningarmöguleikum, dagatal, myndaalbúm og Google Assistant og Alexa síður. Táknin sem notuð eru í Aphasia síðusetinu eru viðeigandi fyrir fullorðna notendur.

Síðuset, rúðustærðir: 6X5, 4x3, 3x3

* Ekki tiltækt í öllum tungumálum.

3.3.6 Express síðuset*

TD Snap® Express síðusettið var hannað með áherslu á einfaldleika og auðvelda notkun á sama tíma og það styður hreyfingu áfram í samskiptum og tungumálakunnáttu. Síðusettið er með leiðandi uppbyggingu og flæði, sem lágmarkar námsferilinn fyrir notendur og gerir kleift að sérsníða. TD Snap® Express veitir orðaforða skipulagðan í einfaldri valmynd með þemum. Hvert þema eða samhengi inniheldur algengar setningasetningar, stök orð og heil skilaboð. Það býður upp á eina ristastærð með 18 hnöppum. Stærri hnapparnir, sem eru samhafðir við allar TD Snap®-studdar aðgangsaðferðir, gera aðgang auðveldari fyrir notandann og uppsetningu einfaldari fyrir samskiptaaðilana.

Síðuset, rúðustærðir: 6x3

* Ekki tiltækt í öllum tungumálum.

3.4 Veldu rúðustærð

Val á rúðustærð fer eftir þó nokkrum þáttum: valnákvæmni er mikilvægust, þar á eftir sjónrænar og athyglisakmarkanir. Ef það eru vandamál við hraða eða nákvæmni valsins, skaltu byrja með færri rúður, þannig að notandi hafi stærri hnappa til að vinna með. Það er auðvelt að breyta rúðustærð í síðusettisstillingum, þannig ekki hafa áhyggjur af að finna rétta rúðustærð í fyrstu tilraun. Þú getur stækkað eða minnkað rúðustærð miðað við breytilega tungumála- eða líkamlega getu.



Ef þú vilt sýna skilaboðaslánna og/eða verkfærastiku verður þú að velja rúðustærð með að minnsta kosti 3 raðir og 3 dálka.

Tafla 3: Dæmi um rúðustærðir (ekki ítarlegt)



2x3




3x4



6x6

4 Yfirlit

Lestu áfram til að læra hvernig á að fara í gegnum efni í TD Snap® og finna allt sem þú þarft til tjáskipta.

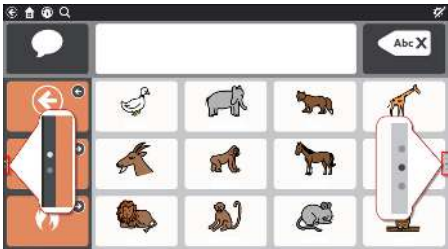Skruna	Þú getur skrunað upp og niður bæði á verkfærastikunni og síðunni. Síðustöðumerkin (punktar til vinstri á verkfærastikunni og hægra megin á síðunni) sýna þér þegar það er meira efni tiltækt fyrir ofan eða neðan. Þú skrunar með því að renna yfir snertiskjáinn eða með því að velja yfirlitshnappinn, en það fer eftir stillingum þínum og aðgangsaðferð. Sjá kafla 14.13.2 <i>Snerti valkostur, síða 108</i> .	
Efsta stika	Hnapparnir vinstra megin á efstu stikunni eru meðal annars til baka hnappur, heimahnappur, stjórnborðshnappur og leita hnappur. Sjá kafla 5 <i>Efsta stika, síða 16</i> .	
Tengla-hnappur	Tenglahnappar fara með þig á aðra síðu. Sjá kafla 9.9 <i>Tengja á síðu / búa til nýja síðu, síða 63</i> .	
Heimsækja hnappur	Heimsækja hnappar fara með þig á aðra síðu, leyfa þér að velja eitt á síðunni og fara síðan með þig aftur á fyrri síðu sjálfvirk. Sjá kafla 9.9.7 <i>Heimsækja síðu, síða 65</i> .	
Til baka hnappur	Til baka hnappurinn virkar eins og til baka hnappur á vefvafra. Veldu til baka hnappinn einu sinni til að fara til baka á fyrri síðu, eða oft til að halda áfram aftur í gegnum síðusögu.	
Boardmaker hnappur	Boardmaker hnapparnir tengjast möppum og athöfnum sem geymdar eru á Boardmaker Online. Skoðaðu og spilaðu athafnirnar hér í TD Snap®! Sjá kafla 9.7.5 <i>Spila Boardmaker athafnir í TD Snap®, síða 54</i> .	

4.1 Augnstýring og skjáborðsaðgangur

Notendur augnstýringar geta vafrað á milli TD Snap® og annarra forrita og eiginleika á tækinu sínu með því að nota skjáborðsaðgang. Skjáborðsaðgangur gefur til kynna hvaða aðgangsverkfæri þarf til að nota augnstýringu á tækinu þínu fyrir utan TD Snap®. Á Windows tækjum er skjáborðsaðgangslausnin TD Control. Á iPad tengdum tækjum er hægt að nálgast skjáborðsaðgang með því að nota eiginleika iPadOS AssistiveTouch. Farðu eftir leiðbeiningunum sem fylgdu tækinu þínu til að samskipa skjáborðsaðgangslausnina þína áður en þú opnar skjáborðsaðgang úr TD Snap®.

Á tvennan hátt getur þú skapað hnapp í TD Snap® sem þú getur notað til að vafra úr TD Snap® og nota skjáborðsaðgang:

- Hnappur af gerðinni virkt efni „Aðgengisstaða skjáborðs“. Sjá kafla 9.6.2 *Virkt efni, síða 38*.
- Hnappavirkni „Víxlhnappur skjáborðsaðgangs“. Sjá kafla 9.7 *Aðgerðir hnapps, síða 47*.

5 Efsta stika

5.1 Til baka



Til baka hnappur fer með þig aftur á fyrri heimsóttu síðu.

5.2 Heima



Heimahnappur fer með þig á heimasíðu (fyrsta síðan sem þú sérð þegar þú ræsir TD Snap®). Heimahnappurinn er flýtleið sem þú getur notað til að fara til baka á heimasíðu þína hvaðan sem er úr hugbúnaðinum. Til að breyta heimasíðu þinni, sjá kafla 10.1.5 *Stilla heimasíðu, síða 79*.

5.3 Stjórnborð



Notaðu stjórnborðshnappinn til að fá beinan aðgang að stjórnborðssíðu þinni. Stjórnborðssíðan er síða fyrir auðveldan aðgang að hnöppum sem eru notaðir oft, sérstaklega hnappar eins og hljóðstyrkur eða fjarstýringar.

5.4 Leita



Leit er aðeins tiltæk með snertiaðgangsaðferðinni en getur þú notað hvaða aðgangsaðferð sem er til að fylgja auðkenndri slóð að orðinu.




Leitarverkfæri sýnir þér hvar þú finnur öll orð í TD Snap®. Settu einfaldlega inn leitarhugtak og fylgdu sjónrænu merkingunum. Sjónrænu merkingarnar leiða þig að markorði þannig að þú getir fundið orðið aftur seinna sjálfur.



1. Veldu **Leita** verkfæri í efstu stiku.
2. Settu inn leitarhugtak.



3. Ef við á, veldu **Stillingar fyrir hnappaleit** til að fínstilla leitarstillingarnar þínar (ekki fáanlegt í Motor Plan síðusettingu):
 - **Leyfa tvöfaldar samsvaranir** — virkja að sýna staðsetningu allra hnappa sem eru eins.
 - **Sýna slóð falinna hnappa** — virkja að sýna faldar slóðir sem nota hnappa sem eru núna faldir.
 - **Aðgengileg leitar-slóð** — virkja að gera auðkennd slóð að markhnappi aðgengilega með hvaða aðgangsaðferð sem er.
4. Veldu hnappinn sem þú leitar að í leitarniðurstöðum.
5. Veldu auðkennda hnappinn á hverri síðu þar til þú kemur að markhnappi. Þú gætir þurft að skruna til að sjá næsta hnapp, þannig að þú skalt líta eftir örvum sem segja þér hvert þú átt að fara!

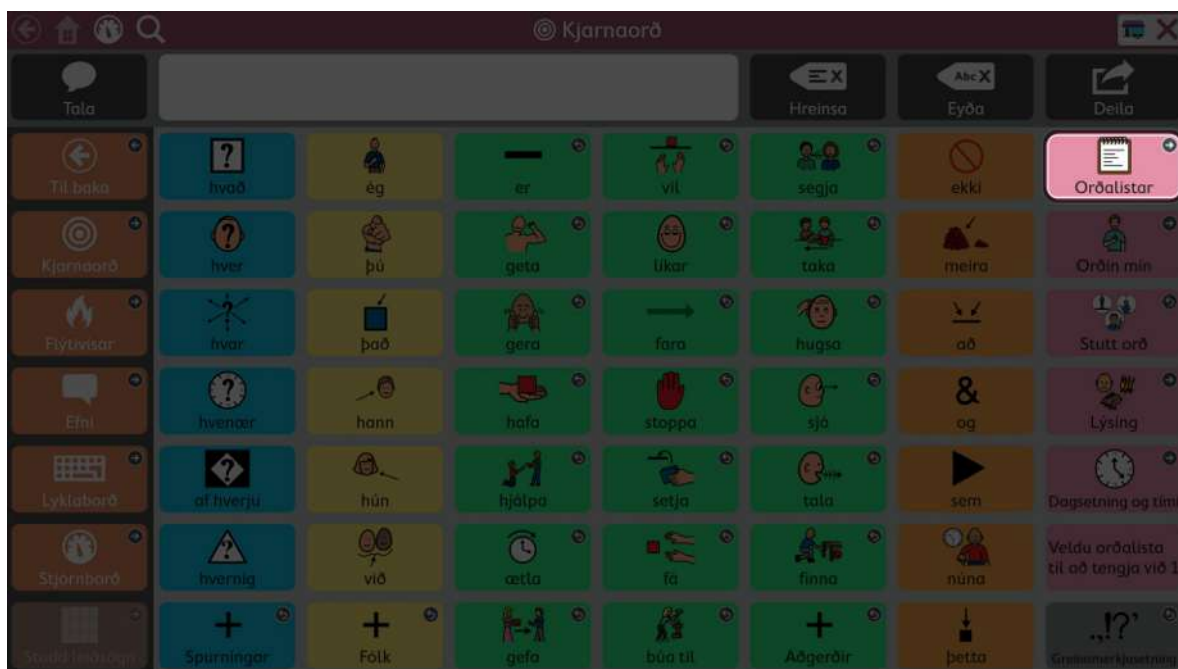

i Taktu eftir hverjum auðkenndum hnappi þannig að þú munir leiðina sjálfur næst. Þú getur hvenær sem er hætt við leitina með því að velja hvar sem er fyrir utan auðkenndu leiðina.

5.5 Félagsgluggavísir

i Félagsgluggavísir er aðeins tiltækur á Tobii Dynavox I-13, I-16 og TD Pilot tækjum.

Félagsgluggavísir gefur þér upplýsingar um stöðu félagsgluggans aftan á tækinu þínu.

Tafla 4: Útlit félagsgluggavísis

Spegla útlit — sýnir textann sem er núna í félagsglugganum.	
Tákna útlit — táknid sýnir að kveikt sé á félagsglugga. Þegar slökkt er á félagsglugganum er táknid ekki til staðar.	

Til að breyta vísiútliti félagsglugga, sjá kafla 15.2.1 *Stillingar félagsgluggavísis*, síða 122.

5.6 Orðaforðasía

i Orðaforðasían er aðeins fánleg í Motor Plan síðusettingu.



Þegar virkjað, takmarkar orðaforðasían orðaforðahnappana í síðusettingu við þá sem tilgreindir eru í völdum orðaforðalistanum. Orðaforði sem er ekki í orðaforðalistanum er falinn. Fyrir frekari upplýsingar um orðaforðasíu, sjá kafla 8 *Orðaforðasía*, síða 28.

5.7 Gagnarakning



Gagnarakning er aðeins aðgengileg með snertingu eða beinum músarsmelli.



Þegar hann er virkjaður, mun gagnarakningarhnappurinn gefa hraðan aðgang að eftirfarandi stillingum: Sýningarham, sýna hnappanotkunartalningu, sýna sýningartalningu og stjórna gögnum. Fyrir frekari upplýsingar um gagnarakningu, sjá kafla *14.14 Gagnarakning, síða 117*.

5.8 Samstillla



Samstilling er aðeins aðgengileg með snertingu eða beinum músarsmelli.



Samstillingarhnappurinn er notaður til að deila síðusetti til samstillingar eða til að uppfæra síðusett sem er þegar deilt fyrir samstillingu. Fyrir frekari upplýsingar um samstillingu, sjá kafla *13.2.4 Samstillla síðusett, síða 94*.

Til að fela samstillingarhnappinn í notkunarham, sjá kafla *14.12.5 Stillingar samstillingar, síða 107*.

5.9 Breyta



Breyting er aðeins aðgengileg með snertingu eða beinum músarsmelli.




Veldu breyta hnappinn til að gera breytingar á síðusetti þínu og fara í stillingar.

Fyrir frekari upplýsingar sjá kafla *9 Breytingar, síða 31*.

6 Skilaboðaslá


Skilaboðasláin sýnir samsettan skilaboðatexta og hnappana til að deila með heiminum!

 Ef þú vilt sýna skilaboðaslánna verður þú að velja rúðustærð með að minnsta kosti 3 raðir og 3 dálka.

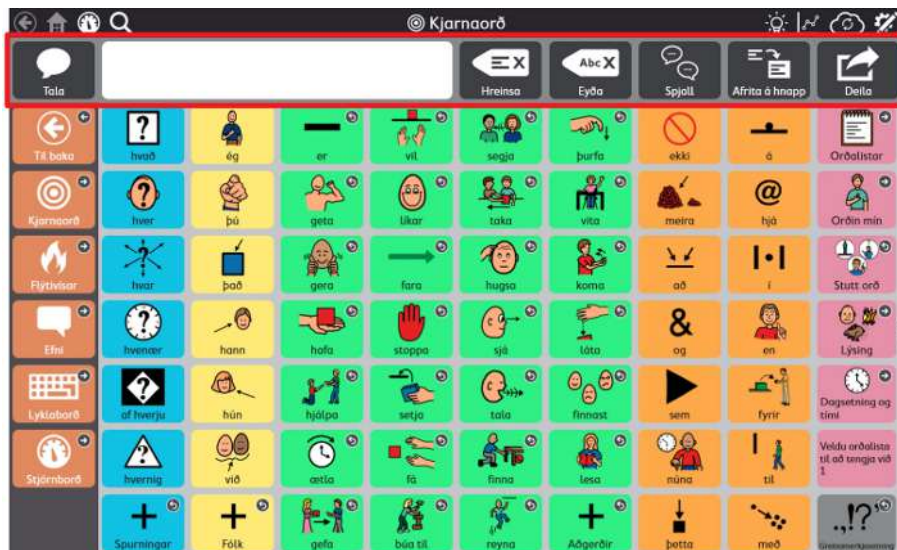

Til að breyta skilaboðaslá, sjá 9.17 *Breyta skilaboðaslá*, síða 74.

6.1 Tala

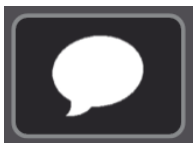

Veldu þennan hnapp til að tala núverandi efni skilaboðagluggans.

 Í Windows tækjum er hægt að nota lyklaborðsflytívísunina **Ctrl + Enter** til að tala skilaboðagluggann.

6.2 Skilaboðagluggi



Skilaboðaglugginn sýnir textann sem þú vilt tala eða senda sem skilaboð. Hann getur líka sýnt tákn. Þú getur sent texta í skilaboðagluggann með hnappi, slegið beint inn í skilaboðagluggann með því að nota lyklaborðssíðu eða venjulegt lyklaborð eða límt texta af kerfisklippiborðinu.

Fyrir stillingar skilaboðaglugga, sjá kafla 14.12.2 *Stillingar skilaboðaglugga*, síða 106.

6.2.1 Breyta texta í skilaboðaglugga.

Þegar texti er færður inn í skilaboðagluggann birtist bendillinn við enda textans sjálfkrafa. Til að færa bendilinn inni í skilaboðaglugganum, notið hnappa forritaða með *Færa bendil* aðgerðinni.

Færa bendil í skilaboðaglugga

- Notið *Færa bendil* aðgerðina til að færa bendilinn á eftirfarandi máta:

- Færa upp eða niður
- Færa áfram eða til baka um staf
- Færa áfram eða til baka um orð
- Færa áfram eða til baka um setningu
- Færa að byrjun eða enda línunnar
- Færa að byrjun eða enda texta skilaboðagluggans
- Færa upp eða niður textasíðu

Til að velja texta, notið hnappa forritaða með *Velja texta* aðgerðinni. Völdum texta í skilaboðaglugga er hægt er að eyða, breyta í feitletrað eða skáletrað, klippa eða afrita, deila yfir í annað forrit, tala og margt fleira. Skoðið skilaboðagluggahlutann í 9.7 *Aðgerðir hnapps*, síða 47 til að læra meira um þessar aðgerðir.

Veldu texta í skilaboðaglugga

- Notið *Valinn texti* aðgerðina til að velja texta, færa textann, eða stækka valið á eftirfarandi máta:
 - Færa valið upp eða niður
 - Færa valið áfram eða til baka um staf
 - Færa valið áfram eða til baka um orð
 - Færa valið áfram eða til baka um setningu
 - Lengja valið að byrjun eða enda línunnar
 - Lengja valið að byrjun eða enda texta skilaboðagluggans
 - Lengja valið upp eða niður textasíðu
 - Lengja valið upp eða niður
 - Lengja valið áfram eða til baka um staf
 - Lengja valið áfram eða til baka um orð
 - Lengja valið áfram eða til baka um setningu
 - Velja allt
 - Hætta við val



Auðveldasta leiðin til að byrja að breyta texta í skilaboðaglugganum er að nota fyrirfram forritaðan skilaboðaglugga á breytingarsíðu. Þessar síður eru í boði í úrvali síðusetta. Breytingarsíður skilaboðaglugga eru einnig fáanlegar í miðstöð síðusetta www.mytobiidynavox.com/pagesetcentral

6.3 Hreinsa



Fjarlægja allt efni úr skilaboðaglugganum.

6.4 Eyða



Eyða núverandi orði eða völdum texta úr skilaboðaglugganum.

6.5 Afturkalla



Afturkalla síðustu aðgerðir í skilaboðaglugganum.

6.6 Endurgera



Endurgera síðustu aðgerð sem var afturkölluð í skilaboðaglugganum.

6.7 Spjall



Kveikja og slökkva á spjalli. Þegar þú virkjar spjall er efni núverandi skilaboðaglugga settur í flýtiminni og síðan er glugginn hreinsaður. Á meðan þú ert í spjalli getur þú sett nýtt efni inn í skilaboðagluggann og talað. Þegar slökkt er á spjalli er efni skilaboðagluggans endurheimt úr minni þannig að þú getir haldið áfram þar sem þú varst áður.

6.8 Afrita á hnapp



Afritaðu textann í skilaboðaglugganum og bættu honum síðan við hnapp. Þetta er notendavæn leið til að breyta hnöppum á hraðferð!

6.9 Deila



Notaðu þennan handhæga, notendavæna eiginleika til að senda texta skilaboðagluggans yfir á AccessIT 3 tæki (9.7.4 *AccessIT*, síða 52), hnapp á núverandi síðu (6.8 *Afrita á hnapp*, síða 21), kerfisklippiborðið eða Google Assistant.

Veldu Annað hnappinn til að senda skilaboðagluggatextann yfir á forrit að eigin vali (eins og Tölvupóst, Facebook, o.s.frv.).



Valmyndin fyrir Annað-hnappinn er eingöngu fáanleg í gegnum Touch.



Skýringamynd 4: Deila valmynd

6.10 Gera hlé á aðgangsaðferð



Stöðva eða hefja aðgangsaðferð þína tímabundið. Þessi hnappur virkar eingöngu með eftirfarandi aðgangsaðferðum: augnstýring, skönnun, og músardvöl.

6.11 Víxlhnappur Orðaforðasíu (eingöngu Motor Plan síðusett)



Kveikja eða slökkva á orðaforðasíu. Þessi hnappur er eingöngu aðgengilegar þegar Motor Plan síðusett eru notuð.

7 Tækjastikan

Til að læra hvernig þú breytir verkfærastikunni, sjá 9.18 *Breyta verkfærastiku*, síða 76.



 Valmöguleikar í tækjastíkunni fer eftir hvaða síðusettt þú notar.


7.1 Til baka



Skýringamynd 5: Til baka hnappur - tækjastika

Til baka hnappurinn virkar eins og til baka hnappur í vafra. Notaðu hann til að fara til baka á síðustu síðu.

7.2 Kjarnaorð

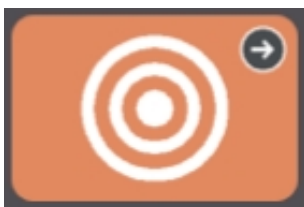

Skýringamynd 6: Kjarnaorðnappur — Core First verkfærastika

Þessi hnappur opnar kjarnaorðasiðuna. Aðalsmerki Core First er kjarnaorðatækni, sem var byggð á rannsóknum, klínískri reynslu og notendaprófunum. Helstu eiginleikar kjarnaorðasiðu eru meðal annars:

- Orðaval fyrir hámarksnotkun á mörgum sviðum.
- Orðastaðsetning.
- Röðun orðainnleiðingar.
- Stöðug staðsetning orða á meðan öðrum er kerfisbundið bætt við.
- Skilvirkni leiðsagnar.
- Stuðningur sem kennir notendum merkingu orða og hvernig á að sameina þau til að búa til einkvæm skilaboð.


7.3 Flýtivísar



Skýringamynd 7: QuickFires hnappur - tækjastika

Flýtivísar eru hröð, fyrirsjáanleg skilaboð sem hægt er nota ein eða í sameiningu. Þetta eru lítil orð til að halda samtalinu gangandi, ná athygli, eða gera athugasemdir. Einnig eru innifalin skilaboð sem eru oft notuð sem einbeita sér að persónulegum þörfum, kveðjum, félagslegum þáttum, tilfinningum, spurningum og viðgerðum. Flýtivísar tala strax og setja ekki texta inn í skilaboðagluggann.


7.4 Efni

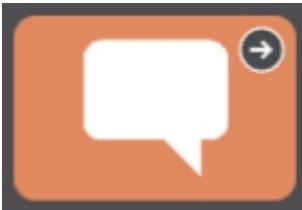

Skýringamynd 8: Viðfangsefni hnappur - tækjastika


Efni styður tjáskipti í sérstökum aðstæðum eða í kringum sérstök þemu. Veldu efni úr efnissíðunni til að sjá viðeigandi orð og setningar. Sérsmíðu síðusettið með því að bæta við eigin efni!

7.4.1 Efnisorð

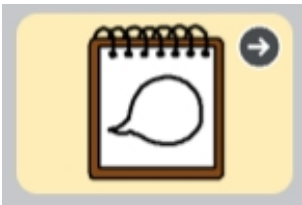


Þessar síður innihalda orð sem oft eru notuð í völdu efni.

7.4.2 Stuðningur

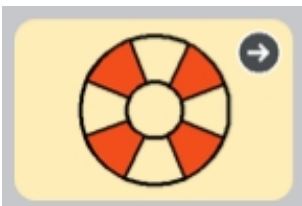

Stuðningur hjálpar notendum með sjálfstjórn og félagsleg tjáskipti. Til að læra hvernig á að breyta stuðningi, sjá kafla 9.13 *Breyta stuðningi*, síða 67.

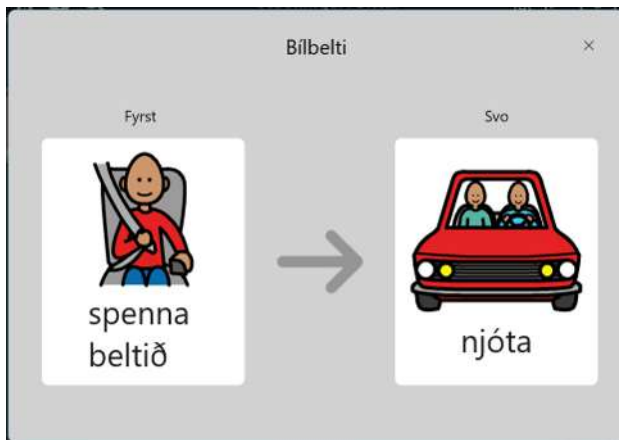

Skýringamynd 9: Fyrst, Síðan stuðningur - Þessi stuðningur sýnir tveggja skrefa röð atburða sem styrkir orsök og afleiðingu eða rökrétt skref.



Skýringamynd 10: Stuðningur við smááætlun - Smááætlunin sýnir fjölskrefa röð atburða sem styrkir hugmyndina um orsök og afleiðingu eða röð rökréttra skrefa.



Skýringamynd 11: Stuðningur lýsingar - Lýsing gefur forgerðar setningar sem eru oft notaðar í kringum gefið efni. Lýsingar eru notaðar til að búa til félagshæfnisögur og hjálpa til að líkja eftir viðeigandi samtali.



Skýringamynd 12: Sjónrænn tímavaka stuðningur - Sjónræni tímavakinn sýnir niðurtalsklukku og kvikaða litastiku í efstu stiku. Númeraskjárninn telur niður tiltekinn tíma og litastikan minnkar eftir því sem eftirstandandi tími minnkar. Þegar vekjaravalkosturinn er virkjaður heyrir hljóð þegar tíminn er búinn.

Til að hætta við sjónrænan tímavaka skaltu velja **X** hægra megin á efstu stikunni.



Til að breyta kjörstillingum niðurtalstíma eða vekjara, skaltu breyta hnappinum og velja sjónrænn tímavaki aðgerðina.

7.5 Lyklaborð



Skýringamynd 13: Lyklaborð hnappur - tækjastika

Lyklaborðssíðan gefur hnappa fyrir staka stafi sem virka eins og lyklar á lyklaborði. Notaðu þessa síðu til að semja orð sem eru ekki tiltæk í síðusettnu þínu eða til að bæta við greinarmerkjum. Til að stilla inn ákjósanlega lyklaborðssíðu, sjá 10.1.6 Stilla inn lyklaborðssíðu, síða 79.

7.6 Stjórnborð



Skýringamynd 14: Stjórnborð hnappur - tækjastika

Stjórnborðssíðan er síða fyrir auðveldan aðgang að hnöppum sem eru notaðir oft, sérstaklega hnappar eins og hljóðstyrkur eða fjarstýringar.

7.7 Orðaform



Skýringamynd 15: Orðaformahnappur — Core First verkfærastika

Orðaformasíðan sýnir mismunandi form (tíðir, númer o.s.frv.) síðasta orðs í skilaboðaglugganum. Veldu ákjósanlegt orðaform til að uppfæra orðið í skilaboðaglugganum.

7.8 Studd leiðsögn



Skýringamynd 16: Studd leiðsögn — Core First verkfærastika

Studd leiðsögn síðan er heimasíða fyrir upphafs-rúðustærð (<3x3). Studd leiðsögn hnappurinn í verkfærastikunni gerir síðuna tiltæka í öllum rúðustærðum.

7.9 Núverandi Boardmaker athöfn



Skýringamynd 17: Núverandi Boardmaker athöfn — Core First verkfærastika

Opnaðu Boardmaker athöfnina sem er í gangi, ef það á við. Ef það er engin Boardmaker athöfn í gangi er þessi hnappur óvirkur. Smámynd hnappsins og flipi uppfærist til að sýna framvindu Boardmaker athafnarinnar sem er í gangi.

7.10 abc (aðeins þýska)



Þessi hnappur opnar ABC orðaforðasvæðið sem er þekkt úr „LiterAACy“. Þar er að finna meira en 3.600 orð úr kjarna- og jaðarorðaforða, raðað eftir fyrsta og öðrum staf.

- ABC svæðið styður nám og notkun á læsiskunnáttu.
- Hljóðfræðisvar spilast þegar stafur er valinn.
- Það eru tvær útgáfur af þessum eiginleika, einn sem notar hástafi og annar með lágstafi. Lágstafa abc hnappurinn er sjálfvalinn. Til að nota hástafi skaltu gera (hástafa) ABC hnappinn í verkfærastikunni sjáanlegan og fela (lágstafa) abc hnappinn. Sjá kafla 9.5.6 *Fela/sýna hnapp*, síða 36.

8 Orðaforðasía

 Orðaforðasían er aðeins fáanleg í Motor Plan síðusetnum.

Orðaforðasían er tæki sem gerir umönnunaraðila kleift að breyta því á fljótlegan hátt hvaða orð eru í boði fyrir notandann. Þegar orðaforðasían er virkjuð er aðeins orðaforðinn í virka orðaforðalistanum tiltækur. Orðaforði sem er ekki á listanum er falinn.

Þú getur notað orðaforðasíuna til að auka orðaforða notandans stigvaxandi með tímanum: byrjaðu á fáum orðum og bættu við fleiri eftir því sem notandinn verður öruggari með því að nota AAC og stækkar orðaforða sinn.

Einnig er hægt að nota orðaforðasíuna sem tímabundið kerfi til að einbeita sér að tilteknum orðum meðan á meðferð stendur. Í upphafi meðferðarlotu skaltu nota orðalista sem inniheldur aðeins orðin fyrir kennslustundina eða verkefnið. Þegar lotunni er lokið skaltu slökkva á orðaforðasíunni eða fara aftur í stærri orðaforðalistann.

8.1 Kveikt eða slökkt á orðaforðasíu



1. Veldu **Orðaforðasíu** táknið í efstu stiku.
2. Stilltu orðaforðasíuna á efstu stikunni á KVEIKT eða SLÖKKT.

 Nafn virka orðalistalistans er sýnt á efstu stikunni.



Orðaforðasía afvirkjuð



Orðaforðasía virkjuð

8.2 Breyta orðforðalista

Það eru nokkrar leiðir til að bæta við og fjarlægja orðaforða í orðaforðalistanum þínum.



1. Veldu **Orðaforðasíu** táknið í efstu stiku.
2. Breyttu orðaforðalistanum þínum með því að nota einhverja af eftirfarandi aðferðum:



1.	Veldu orðaforðahnappa á síðunni til að bæta við eða fjarlægja þá af listanum.	3.	Veldu Flýtiðbót til að opna textareit neðst á síðunni. Sláðu inn orðaforða, aðskilinn með kommu, í textareitinn og veldu síðan Bæta við . Athugaðu: Orðaforði sem er ekki til staðar í síðusettingu er sýndur með rauðu.
2.	Notaðu Fjarlægja... og Bæta við.. hnappa til að gera breytingar á stórum flokkum orðaforða í einu.	4.	Veldu Breyta orðforðalista táknið til að skoða og breyta orðforðalistanum sem stafrófsröðuðum, leitarlegum textalista. Athugaðu: Orðaforði sem er ekki til staðar í síðusettingu er sýndur með rauðu.

i Hnappar sem sýndir eru í fullum lit eru á orðforðalistanum. Hnappar sem sýndir eru með gráu yfirlagi eru ekki á orðforðalistanum.

Tengillhnappur verður tiltækur þegar einhverjum orðaforðahnappi á tengdu síðunni er bætt við orðforðalistann. Til dæmis verður hnappurinn Matur og drykkur grár (ekki í boði) ef enginn matarorðaforði er á orðforðalistanum. Ef þú bætir „Pizzu“ við orðalistann verður Matur og drykkur hnappurinn sjálfkrafa aðgengilegur.

8.3 Veldu orðforðalista



1. Veldu **Orðaforðasíu** táknið í efstu stiku.



2. Veldu **Breyta orðforðalista** táknið.
3. Veldu **Stjórna listum**.
4. Veldu orðforðalista. Valinn listi er nú virkur.

8.4 Búa til nýjan orðforðalista



1. Veldu **Orðaforðasíu** táknið í efstu stiku.



2. Veldu **Breyta orðforðalista** táknið.
3. Veldu **Stjórna listum**.
4. Veldu **Nýr listi**.

5. Veldi **Tómur listi**
6. Veldu **Búið**.

8.5 Flytja inn orðalista (.txt skrá)



1. Veldu **Orðaförðasíu** táknið í efstu stiku.



2. Veldu **Breyta orðaförðalista** táknið.
3. Veldu **Stjórna listum**.
4. Veldu **Nýr listi**.
5. Veldu **Staðbundnar skrár**
6. Veldu **Vafra**.
7. Flettu að .txt skránni, veldu hana og veldu síðan **Opna**.
8. Sláðu inn heiti fyrir nýja orðaförðalistann þinn og veldu síðan **Lokið**.

8.6 Deila orðförðalista



1. Veldu **Orðaförðasíu** táknið í efstu stiku.



2. Veldu **Breyta orðaförðalista** táknið.
3. Veldu **Stjórna listum**.



4. Veldu **Meira** hnappinn við hlið listans sem þú vilt deila.
5. Veldu **Deila**, veldu síðan deilingaraðferð:
 - **Flytja út í skrá** — vistaðu orðaförðalistann sem .txt skrá.
 - **Afrita á klippiborð** — afritaðu innihald orðaförðalistans yfir á klippiborðið svo þú getir límt það annars staðar (t.d. í tölvupóst, Word skjal osfrv.)
 - **Annað** — deila orðaförðalistanum beint í annað app. Valkostir appa eru mismunandi eftir uppsetningu tækisins.

8.7 Endurnefna, afrita eða eyða orðaförðalista



1. Veldu **Orðaförðasíu** táknið í efstu stiku.



2. Veldu **Breyta orðaförðalista** táknið.
3. Veldu **Stjórna listum**.



4. Veldu **Meira** hnappinn við hlið listans sem þú vilt endurnefna, afrita eða eyða.
5. Veldu viðkomandi aðgerð.
 - **Endurnefna** — settu inn nýtt nafn fyrir orðaförðalistann.
 - **Afrita** — búa til afrit af orðaförðalistanum.
 - **Eyða** — eyða orðaförðalistanum. Ekki er hægt að eyða virka orðaförðalistanum (tilgreint með gátmerki).

9 Breytingar

Til að breyta hnappi, síðu, stillingum, eða notendum þarf hugbúnaðurinn að vera í breytingaham. Hægt er að fara í



breytingaham hvenær sem er með því að velja

Breyta hnappinn.



Breyta hnappurinn og breytingarhamur eru aðeins tiltækir með snertiaðgangsaðferðinni.

Á meðan þú ert í breytingaham getur þú tvísmellt á flesta síðuhnappa til að sjá hvernig þeir haga sér í notkunarham.

9.1 Breytingasvæði

breytingasvæði inniheldur öll verkfæri og flipa til að gera breytingar á síðusetti þínu og hugbúnaði.



Skýringamynd 18: breytingasvæði (sýndur stækkaður)



Veldu

til að stækka breytingagluggann.



Breyttu stærð breytingagluggans til að sérsníða stærðina með því að draga svæðið er stækkað.

upp eða niður á meðan

9.2 Bæta við hnappi



1. Veldu

Breyta hnappinn.




2. Veldu

í tómu hólfi á síðunni til að búa til nýjan hnapp.




Skýringamynd 19: Tómt hólf

9.3 Færa hnapp

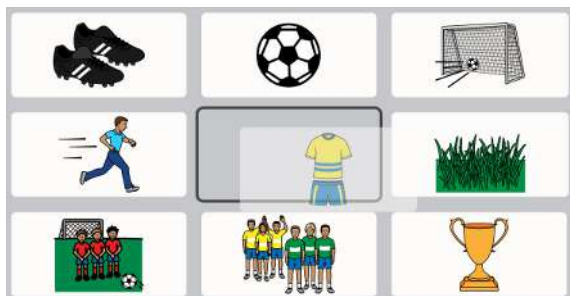

Skýringamynd 20: Skipta — Þegar þú dregur hnapp beint ofan á annan hnapp munu hnapparnir tveir skipta um stað á síðunni. Svarta útlínan í kringum valinn stað í rúðustærðunum sýnir skipti.

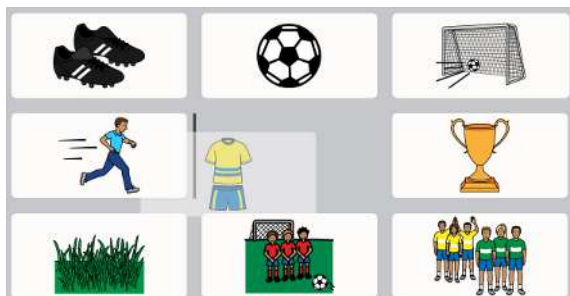

Skýringamynd 21: Bæta inn í — Þegar þú dregur valinn hnapp á milli tveggja hnappa mun hnappurinn til hægri og neðan færast til að búa til pláss fyrir hnappinn. Hnapparnir munu halda sömu röð vinstri til hægri, ofan frá og niður á síðunni. Staðsetning hnapps sem er bætt inn í er sýnd á lóðréttu slánni.



Þú getur sett inn hnapp lárétt (eins og sýnt er að ofan) eða lóðrétt.



Þegar þú færir hnapp á það aðeins við um núverandi rúðustærð.

9.4 Breyta stærð hnapps

Þú getur breytt stærð hnapps þannig að hann nái yfir jafn margar rúður innan síðu eða tækjastikunni og þú vilt.




1. Veldu


Breyta hnappinn.

2. Veldu hnapp á síðunni eða tækjastikunni. Aðeins er hægt að breyta stærð hnapps þegar einn hnappur er valinn.

3. Veldu og haltu niðri á einum af bláu punktunum í horninu á völdum hnappi og dragðu síðan til að breyta stærð hnappsins.

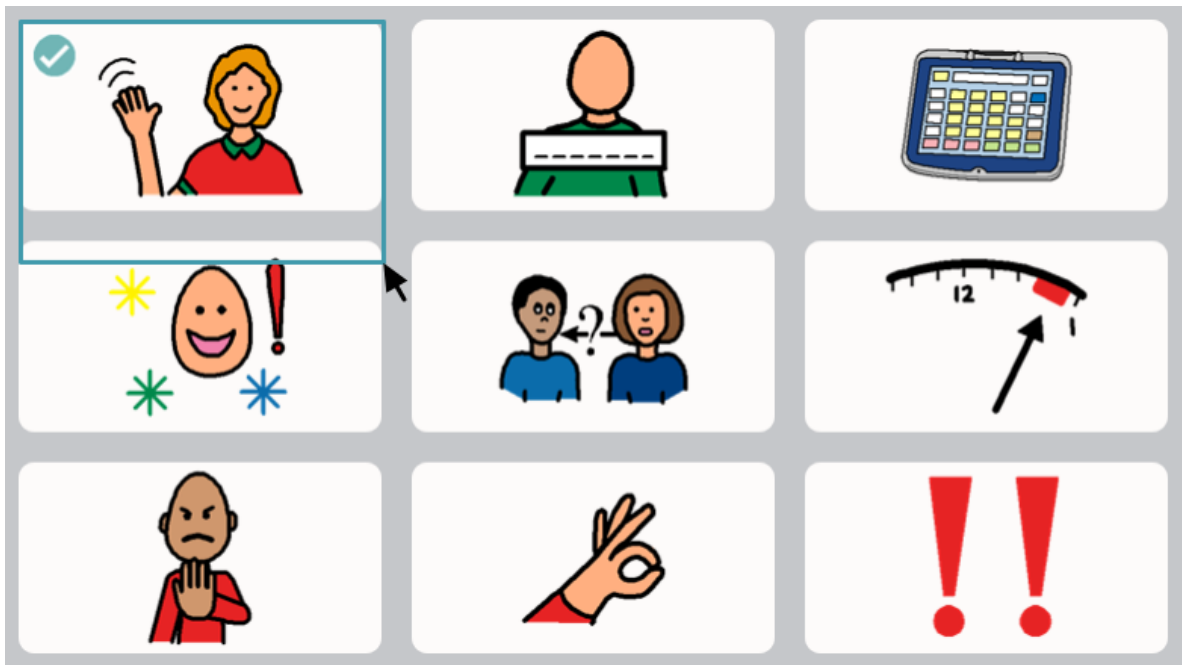

4. Bíddu þangað til hnappurinn fyllir algjörlega út í rúðurnar og er kominn upp í æskilega stærð og slepptu síðan valinu. Þegar þú stækkar hnapp mun hnappurinn sem er færður úr stað færast í næsta tóma hólfi.

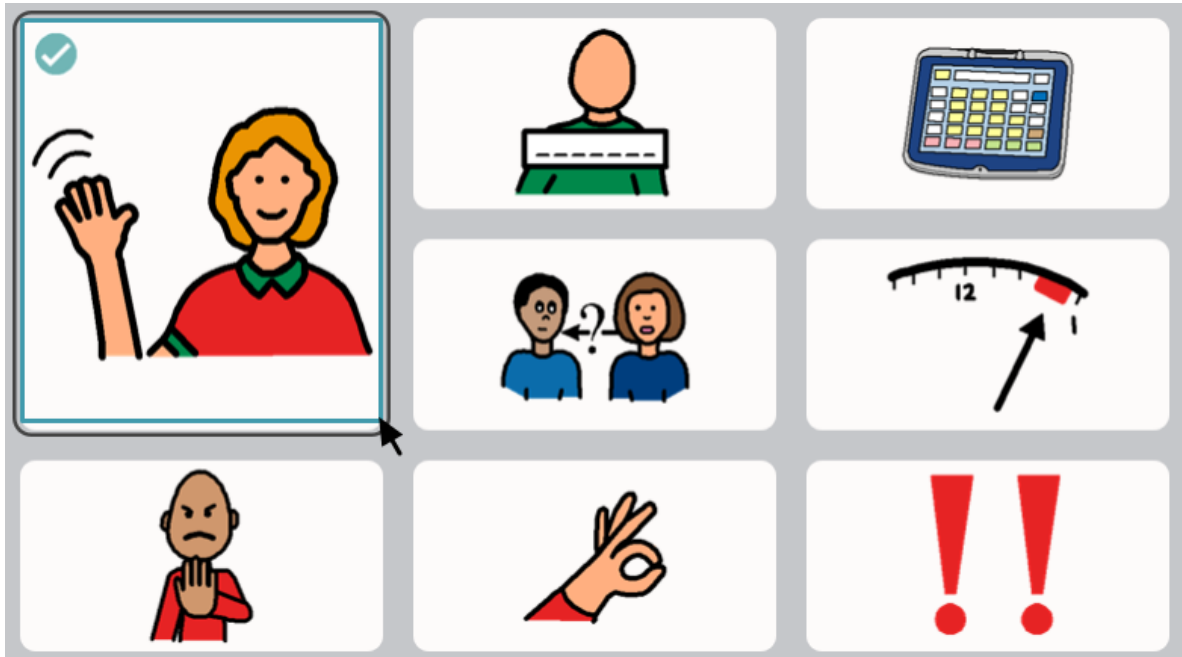

Hnappar sem er búið að breyta stærð á geta farið yfir heila síðu- eða tækjastikuhluta.



Ekki er hægt að breyta stærð hnapps eða færa hann yfir í hólfi sem leiðsagnar (skrun) hnappurinn er í.



Þegar þú breytir stærð hnapps á það aðeins við um núverandi rúðustærð.

9.5 Hnappabreytingaverkfæri

Verkfærin sem er að finna hægra megin í forritaglugganum hjálpa þér að breyta hnöppum sem eru valdir núna.



Skýringamynd 22: Hnappabreytingaverkfæri — (ofan frá og niður) afturkalla, endurgera, afrita, líma, velja allt, fjölval, renningsval, fela/sýna, stafrófsröð, eyða, víkka / draga saman nöfn verkfæra

9.5.1 Afturkalla og endurgera

 Afturkalla verkfærið gerir þér kleift að afturkalla síðustu 100 breytingar sem gerðar voru á núverandi notanda/síðusetti.  Endurgera verkfærið setur inn aftur síðustu breytingu sem þú afturkallaðir með afturkalla verkfærinu.



Afturkalla staflinn er endurstílltur þegar nýjum notanda eða öðru síðusetti er hlaðið inn og þegar TD Snap® hugbúnaðinum er lokað.

9.5.2 Afrita og líma hnapp



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.

3. Veldu  **Afrita** verkfæri.
Taktu eftir að líma verkfærið sýnir fjölda hnappa sem þú hefur afritað.

4. Veldu  **Líma** verkfæri.
Hnappurinn mun límast á fyrsta tiltæka tóma hólfa á síðunni.

9.5.3 Velja alla hnappa

Velja allt verkfærið velur sjálfvirkir alla hnappa á núverandi síðu svo þú getir framkvæmt magnbreytingar aðgerðir.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Hnappinn** flipann.
3. Veldu  **Velja allt** verkfæri.
Eftir að þú velur allt getur þú smellað á einstaka hnappa til að afvelja þá; hinir hnapparnir verða áfram valdir.
4. Gerðu ákjósanlega breytingu á hnöppunum.
5. Til að afvelja alla hnappa, skaltu velja  **Fjölval** verkfæri.

9.5.4 Velja marga hnappa



Fjölvals verkfærið gerir þér kleift að velja (handvirkir) marga hnappa í einu, þannig að þú getir framkvæmt breytingar á þeim öllum í einu.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Hnappinn** flipann.
3. Veldu  **Fjölval** verkfæri.
Fjölvalsverkfærið er svart þegar það er óvirk og blátt þegar það er virkt.
4. Veldu hnappana sem þú vilt breyta á sama tíma.
5. Gerðu ákjósanlega breytingu á hnöppunum.
6. Til að afvelja alla hnappa, skaltu velja  **Fjölval** verkfæri.

9.5.6.1 Fela



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp sem þú vilt fela.
3. Veldu  **Fela** verkfæri.



Sjálfvalin aðgerð fyrir fela/sýna verkfæri er að setja sýnileika á þann hnapp allstaðar þar sem hann birtist í síðusettingu. Til að stilla sýnileika aðeins fyrir valið tilvik af hnappinum skaltu smella og halda (ýta lengi) á fela/sýna verkfærið og velja **Breyta sýnileika hér**.

9.5.6.2 Sýna



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu falinn hnapp.
3. Veldu  **Sýna** verkfæri.



Sjálfvalin aðgerð fyrir fela/sýna verkfæri er að setja sýnileika á þann hnapp allstaðar þar sem hann birtist í síðusettingu. Til að stilla sýnileika aðeins fyrir valið tilvik af hnappinum skaltu smella og halda (ýta lengi) á fela/sýna verkfærið og velja **Breyta sýnileika hér**.

9.5.7 Raða hnöppum í stafrófsröð

Notaðu stafrófsröðunarhnappinn til þess að raða völdum hnöppum í stafrófsröð. Hnappar eru flokkaðir í eftirfarandi röð: stafrófsröð eftir merki, síðan spáhnappar, síðan auðir hnappar.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Hnappinn** flipann.
3. Notaðu  **Fjölval** eða  **Renningsvals** verkfærið til að velja hnappana sem þú vilt flokka.
4. Veldu  **Stafrófsröðun** verkfærið.

9.5.8 Eyða hnappi



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu  **Eyða** verkfæri.

9.5.9 Víkka / fella saman breytingaverkfæri nöfn

Veldu  tvöföldu örvarnar til að sýna nöfn breytingaverkfæra. Veldu  tvöföldu örvarnar til að fela nöfn verkfæra.

9.6 Hnappa efni



Skýringamynd 26: Hnappur með merki, tákn, bakgrunnslit og meðalramma.

9.6.1 Merki hnapps

Hnappamerkið er textinn sem birtist á hnappinum.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Sláðu inn í **Merki** textareitinn.



Skýringamynd 27: Textareitur hnappamerki

Ef þú vilt breyta öðrum einkennum merkis (leturgerð, lit, staðsetningu, stærð o.s.frv.) sjá kafla *9.8.3 Merki hnapps*, síða 60.

9.6.2 Virkt efni

Virkt efni gerir þér kleift að sýna virkar upplýsingar á hnappi. Merki hnapps og tákn breytast til að endurspegla núverandi upplýsingastöðu.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Virkt efni**. (Eingöngu fánlegt ef **Hnappagerð** er stillt á **Venjuleg**)
4. Veldu gerð virks efnis.



Skýringamynd 28: Virkt efni

Gerð virks efnis	Lýsing
Engin	Veldu Ekkert til að fjarlægja Virkt efni af hnappinum.
Aðgangsaðferð	Sýndu núverandi aðgangsaðferð.
Aðgangsaðferð hlé staða	Athugaðu: Hlé á aðgangsaðferð er aðeins tiltæk í eftirfarandi aðgangsaðferðum: Augnstýring, músadvöl. Þegar aðrar aðgangsaðferðir eru í notkun, eru hnappar sem nota aðgangsaðferð hlé staða, virkt efni, óvirkir. Ef, gera hlé á aðgangsaðferð aðgerð, er til staðar á hnappinum (sjálfvalið), sýnir merkið aðgerðir hnappsins: Hefja aðgang eða gera hlé á aðgangi Ef, gera hlé á aðgangsaðferð aðgerð, er ekki til staðar á hnappinum, sýnir merkið aðgerðir hnappsins: Aðgangur í gangi eða Hlé gert á aðgangi.
Aðgangstími	Athugaðu: Aðgangstími er ekki tiltækur fyrir snertiaðgangsaðferð. Sýnir tímastillingargildið fyrir núgildandi aðgangsaðferð. Raunverulega tímastillingin fer eftir aðgangsaðferð t.d. biðtíma, skönnunarhraða, dvalartíma o.s.frv. Fyrir frekari upplýsingar sjá
Tengistaða AccessIT	Sýnir stöðu AccessIT 3 tæki tengingu: Aftengt, aftengi, tengi, eða tengt. Hægt er að tengja við AccessIT aðgerðina til að búa til hnapp sem sýnir stöðu og tengir við AccessIT tæki þegar hann er valinn.
Staða rafhlöðu	Sýnir prósentu núverandi rafhlöðu stöðu: 0–100%. Táknið breytist til að endurspegla stöðu rafhlöðunnar og sýna hvenær tækið er í sambandi og í hleðslu.
Spjallhamur	Ef, víxla spjallham aðgerð, er til staðar á hnappinum (sjálfvalið), sýnir merkið aðgerðir hnappsins: Spjalla eða stöðva spjall. Ef, víxla spjallham aðgerð, er ekki til staðar á hnappinum, sýnir merkið núverandi stöðu spjallhams: Spjallhamur á eða spjallhamur af.
Núverandi Boardmaker athöfn	Sýna titla og smámyndir af Boardmaker athöfn sem er í gangi (ef einhver). Hægt er að para við núverandi Boardmaker athöfnina til að búa til hnapp sem opnar á Boardmaker athöfnina sem er í gangi og sýnir einnig titil og smámynd athafnarinnar.
Dagsetning	Sýnir núverandi dag, mánuð og ár. Snið dagsetningar fer eftir staðsetningu.
Vikudagur	Sýnir núverandi vikudag.
Aðgengisstaða skjáborðs	Ef víxlaðgerð skjáborðsaðgangs er til staðar á hnappinum (sjálfvalið), sýnir merkið aðgerðir hnappsins: Windows — Ræsið TD Control eða ræsið svæðisbundin samskipti. iPadOS — Ræsið AssistiveTouch eða ræsið svæðisbundin samskipti. Ef víxlaðgerð skjáborðsaðgangs er ekki til staðar á hnappinum, sýnir merki hnappsins núverandi augnstýringarham: Windows — TD Control kveikt eða svæðisbundin samskipti kveikt. iPadOS — AssistiveTouch kveikt eða svæðisbundin samskipti kveikt.
Slökkt á hljóðsvörum staða	Ef, víxlaðu hljóði af hljóðsvörum aðgerð, er til staðar á hnappinum (sjálfvalið), sýnir merkið aðgerðir hnappsins: Taka hljóð af hljóðsvörum eða setja hljóð á hljóðsvörum. Ef, víxlaðu hljóði af hljóðsvörum aðgerð, er ekki til staðar á hnappinum, sýnir merki hnappsins núverandi stöðu hljóð af hljóðsvörum: Hljóð af hljóðsvörum eða Hljóð á hljóðsvörum.

Gerð virks efnis	Lýsing
Hljóðstyrkur hljóðsvörunar	Sýnir styrk hljóðsvörunar. 0–100%. Má para við hækka hljóðsvörun aðgerð eða lækka hljóðsvörun aðgerð til að búa til hnapp sem stjórnar hljóðstyrk og sýnir líka hljóðstyrksstig hljóðsvörunar.
Birtustig félagsgluggavísis	Aðeins Tobii Dynavox I-13 og I-16 tæki. Sýnir birtustig félagsglugga: 0–100%. Má para við hækka birtustig félagsglugga aðgerðina eða lækka birtustig félagsglugga til að búa til hnapp sem stjórnar birtustigi félagsglugga og sýnir einnig núverandi birtustig félagsglugga.
Félagaglugga straumstaða	Aðeins Tobii Dynavox I-13 og I-16 tæki. Ef, víxla straum félagsglugga aðgerð, er til staðar á hnappinum (sjálfvalið), sýnir merkið aðgerðir hnappsins: Kveikja á félagsglugga eða Slökkva á félagsglugga. Ef, víxla straum félagsglugga, er ekki til staðar á hnappinum, sýnir merkið núverandi stöðu félagsglugga: Kveikt á félagsglugga eða Slökkt á félagsglugga.
Talstaða	Ef, tala skilaboðaglugga aðgerð, er til staðar á hnappinum (sjálfvalið), sýnir merkið aðgerðir hnappsins: Tala eða stoppa. Ef, tala skilaboðaglugga aðgerð, er ekki til staðar á hnappinum, sýnir merkið núverandi stöðu tals: Talandi eða ekki talandi.
Hljóð af talhamur	Ef víxlaðu hljóði af tali aðgerð er til staðar á hnappinum (sjálfvalið), sýnir merkið aðgerðir hnappsins: Hljóð af eða hljóð á. Ef víxlaðu hljóði af tali aðgerð er ekki til staðar á hnappinum, sýnir merki hnappsins núverandi stöðu hljóð af tali: Hljóð af eða hljóð á.
Hljóðstyrkur tals	Sýnir hljóðstyrk tals: 0–100%. Má para við hækka hljóðstyrk tals aðgerðina eða lækka hljóðstyrk tals aðgerðina til að búa til hnapp sem stjórnar hljóðstyrk og sýnir líka stig hljóðstyrks tals.
Tími	Sýnir núverandi kerfistíma í klukkustundum og mínútum. Tímasnið fer eftir svæðisstillingu stýrikerfis. Athugaðu: Táknið er almenn klukka sem breytist ekki með tímanum.
Staða orðaforðasíu	Ef aðgerðin Víxla orðaforðasíu er til staðar á hnappinum (sjálfvalið), sýnir merkið aðgerðir hnappsins: Kveiktu á eða slökktu á orðaforðasíu. Ef aðgerðin Víxla orðaforðasíu er ekki til staðar á hnappinum, sýnir hnappamerkin núverandi tal orðaforðasíustöðu: kveikt eða slökkt.
Ár	Sýnir núverandi ár.

9.6.3 Skilaboð hnapps

Hnappskilaboðin geta verið texti, hljóðritað eða hljóðskrá valin úr tækinu þínu. Þegar hnappaskilaboðin eru texti er textinn lesinn upp og settur inn í skilaboðagluggann þegar hnappurinn er valinn. Ef skilaboðaglugginn er ekki til staðar er hnappurinn Skilaboðatexti lesinn upp. Þegar hnappaskilaboðin eru hljóð- eða hljóðskrá, er hnappamerkið slegið inn í skilaboðagluggann og hljóð- eða hljóðskráin spiluð. Þegar skilaboðaglugginn er lesinn upp spilar hljóð- eða hljóðskráin, texti hnappamerkisins er ekki lesinn upp.

9.6.3.1 Breyta texta hnappaskilaboðanna



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Sláðu inn í **Skilaboð** textareitinn.



Skýringamynd 29: Textareitur hnappskilaboða

 Sumar Acapela raddir styðja Vocal Smiley hljóð, eins og hlátur, andvarp, o.s.frv. Sláðu inn Vocal Smiley hljóðkóðann fyrir Acapela röddina þína í skilaboðareitinn til að heyra hann þegar hnappurinn er valinn. Í eftirfarandi hlekk finndu tungumálið þitt og röddina til að skoða Vocal Smiley hljóðin sem eru í boði fyrir Acapela röddina þína: [Acapela Vocal Smiley codes](#). TD Snap styður ekki Acapela Vocal Smiley hljóð ásamt (S) eða Vocal Smiley upphröpunum.

9.6.3.2 Taka upp

1. Veldu  **Taka upp** Taka upp skilaboð svar opnast.
2. Veldu  **Taka upp** til að hefja upptöku.
3. Þegar þú hefur lokið upptökunni, veldu  **Stöðva**.
4. Til að heyra upptökuna skaltu velja  **Spila**.
5. Þegar þú hefur lokið við að búa til upptökuna, veldu **Vista** til að vista upptökuna. Veldu **Hætta við** til að loka Taka upp skilaboð svarinu án þess að vista

9.6.3.3 Bættu hljóðskrá við hnappaskilaboð

Bættu við hljóðskrá til að búa til hnapp sem spilar lag eða aðra hljóðrás.

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu  **Bæta við hljóðskrá**.
4. Flettu að og veldu hljóðskrá í tækinu þínu. Skrár verða að vera <50MB.
Stuðlar skráargerðir: .aac, .m4a, .mp3, .wav, .wma
5. Veldu **Búið**.

9.6.4 Hljóðmerki hnapps

Hljóðmerkið má nota með snertiútgöngu, músadvöl, augnstýringu og skönnunar aðgangsaðferðum. Hljóðmerkið er forskoðun hnapps sem er talað þegar hnappurinn er auðkenndur en enn ekki búið að velja hann.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Hljóðmerki** til að stækka röðina.
4. Sláðu inn í **Hljóðmerki** textareitinn.



Skýringamynd 30: Textareitur hljóðmerkis hnapps

Ef þú vilt taka upp sérsniðið hljóðmerki, sjá kafla 9.6.3.2 *Taka upp, síða 41*.

9.6.5 Mynd hnapps

Hnappur getur sýnt eitt tákn eða mynd.




1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Bæta mynd við hnapp:
Til að leita að tákni í táknaðunum þínum:

- Veldu  **Táknaleit** hnappinn.
- Táknaleitarsvar opnast.
- Sláðu inn í textareitinn til að finnstilla leitarskilmála.

- Valkvætt: Til að skapa síur fyrir leitarniðurstöður, veldu hnappinn eiginleikana sem þú vilt sjá í táknleitarniðurstöðum þínum (fullorðinn, barn, kona, karl).
- Veldu viðeigandi tákn.
- Veldu **Búið**.




Táknasía og veldu síðan

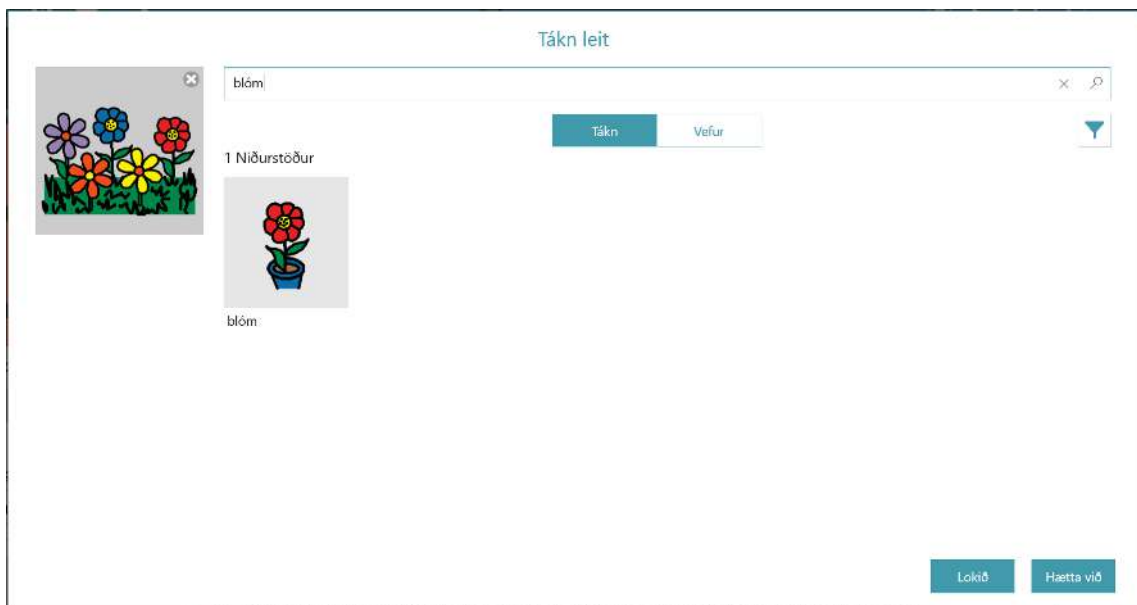

Til að leita að mynd á vefnum (nettenging nauðsynleg):

- Veldu  **Táknaleit** hnappinn.
- Táknaleitarsvar opnast.
- Veldu **Vefflipann** og sláðu síðan inn leitarorð í textareitinn.
- Veldu viðeigandi mynd.
- Veldu **Búið**.

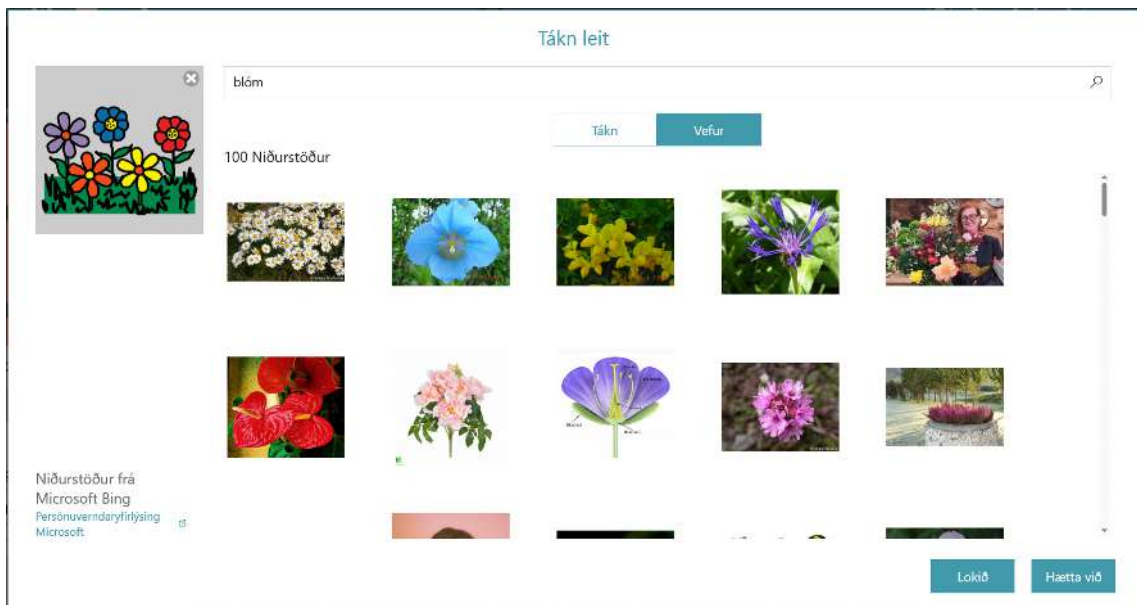

Til að nota myndavél til að taka mynd fyrir hnappamynd.

- Veldu  **Myndavél** hnappinn.
- Veldu **Frá myndavél**.
- Notaðu myndavélina á tækinu til að taka mynd.

Til að nota mynd sem geymd er á tækinu:



- Veldu **Myndavél** hnappinn.
- Veldu **Frá myndagagnasafni**.
- Notaðu skráavafrann til að fara að ákjósanlegri myndaskrá.

Ef þú vilt ekki hafa tákn á hnappnum skaltu velja **X** í horni núverandi táknis eða stilla uppsetningu hnappa á aðeins merki. Sjá kafla 9.8.4 *Uppsetning hnappa, síða 61*.



9.6.6 Breyta tákn


Breytingar á tákninu sem gerðar eru í táknaritlinum munu bara taka til einstaks tilviks þess táknis (á þeim hnappi sem þú hefur valið) og tekur ekki til annarra altækra tilvika þess táknis. Ef þú vilt gera altækar breytingar á hárlit eða húðlit allra tákna skaltu nota Síðusett > Stíll > Táknalitir. Sjá kafla 10.3.1 *Húðlitur og hárlitur tákns, síða 80*. Athugið: tákn sem hefur verið breytt í táknaritlinum verður ekki lengur uppfært með stillingum táknhúðlita og hárlita.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp sem er með tákn.




3. Veldu hnappinn **Táknaritill**.
4. Breyttu tákninu með því að nota verkfærin sem lýst er hér að neðan.
5. Veljið **Lokið** til að vista breytingarnar þínar og loka táknaritlinum. Veljið **Hætta við** til að henda breytingunum þínum og loka táknaritlinum.

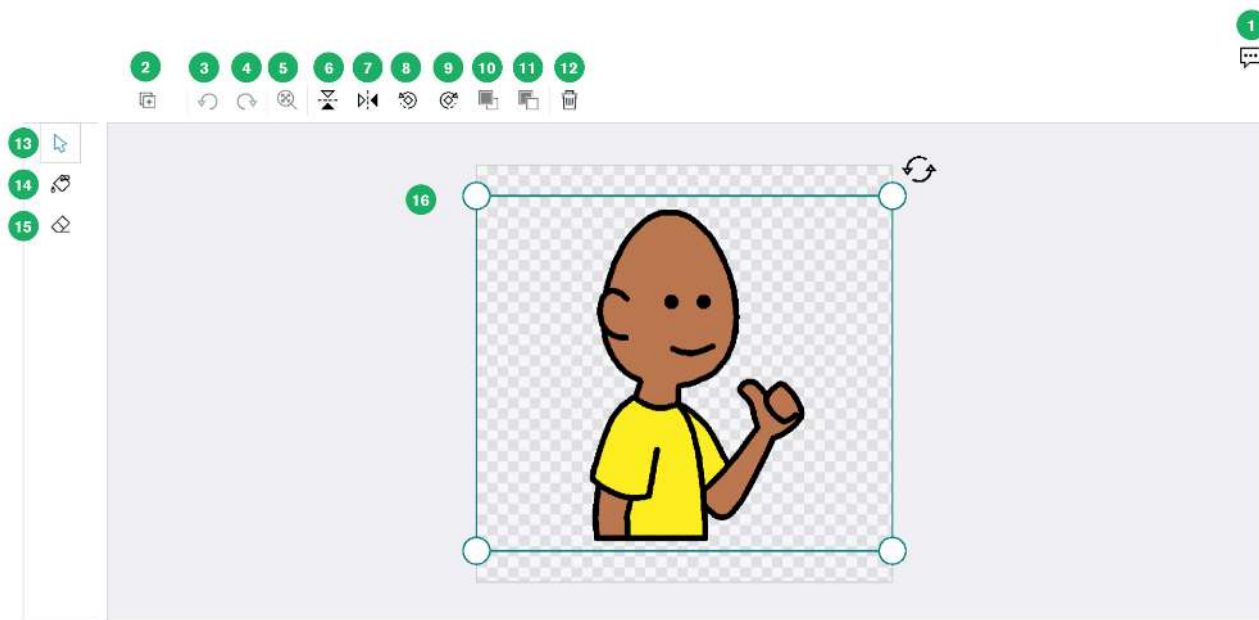


Tafla 5: Tákn ritstjóri - Veldu Verkfæri

	Nafn verkfæris	Lýsing
1	Endurgjöf um tákn	Sendu endurgjöf um þetta tákn til Tobii Dynavox.
2	Bæta við mynd	Bættu mynd við táknið. Veldu úr táknaafninu, taktu mynd með myndavél tækisins eða veldu úr myndasafninu þínu. Athugaðu: Hægt er að velja myndir sem bætt er við striga fyrir sig þar til þú gerir eitt af eftirfarandi: Veldu Lokið til að vista breytingarnar þínar og loka táknaflitilinum, nota eitthvað af Eyða verkfærunum eða nota eitthvað af Paint verkfærunum. Þegar eitthvað af þessum aðgerðum er gripið til eru myndirnar á striganum flattar út í eina mynd.
3	Afturkalla	Afturkalla síðustu aðgerð.
4	Endurgera	Endurgera síðustu afturkölluðu aðgerð.
5	Passa á skjáinn	Skalaðu aðdráttarstigið til að passa við lausan skjápláss. Ef þú hefur stækkað inn á strigann geturðu notað þetta tól til að skoða allan strigann aftur.
6	Lóðrétt snúningur	Snúðu núverandi vali lóðrétt.
7	Lárétt snúningur	Snúðu núverandi vali lárétt.
8	Snúðu rangsælis	Snúðu núverandi vali rangsælis.
9	Snúðu réttsælis	Snúðu núverandi vali réttsælis.
10	Komdu fram	Færðu núverandi val fram í lagstaflanum.
11	Sendu á bak	Sendu núverandi val aftur í lagstaflann.
12	Eyða	Eyða núverandi vali.
13	Veldu	Veldu þátt til að breyta því. Aðeins er hægt að velja einn þátt í einu.
14	Málning	Skiptu um lit á svæði. Sjá töfluna táknritara - málningartól hér að neðan.
15	Þurrka út	Fríhendiseyðsla. Sjá töfluna táknritara - Erase Tools hér að neðan.
16	Striga	Köflotta svæðið er striga sem skilgreinir mörk táknsins. Notaðu klípubendingar með snertiskjá eða skrunhjól á mús til að pysja inn og út á striga. Í myndinni hér að ofan er myndin á striganum valin. Veldu og dragðu horn valrammans til að breyta stærð myndarinnar. Veldu og dragðu snúningstáknið til að snúa myndinni.

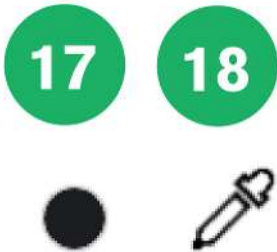

Tafla 6: Tákn ritstjóri - málningarverkfæri

	Nafn verkfæris	Lýsing
17	Litur	Stilltu litinn til að mála með. Veldu úr stöðluðum litum, nýlega notuðum litum eða veldu + til að búa til þinn eigin sérsniðna lit.
18	Dropari	Notaðu dropann til að velja lit á striga, notaðu síðan þann lit til að mála með.

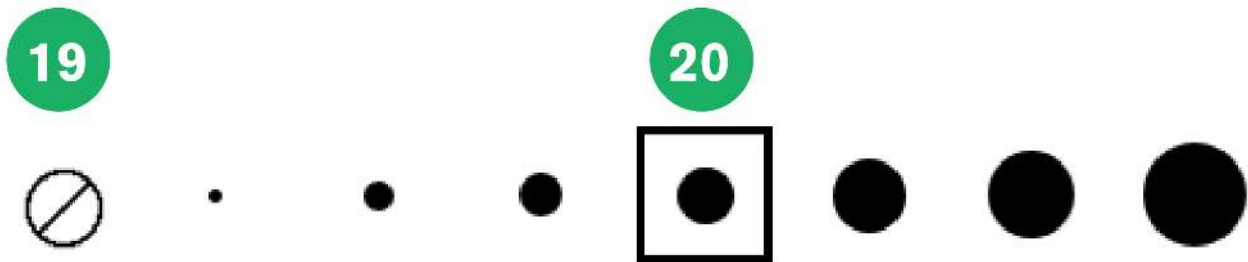

Tafla 7: Tákn ritstjóri - Erase Tools

	Nafn verkfæris	Lýsing
19	Hreinsa	Fjarlægðu allt af striganum.
20	Stærð strokleðurs	Veldu stærð fyrir strokleðurtólið.

9.6.7 Hnappagerðir


Stilling hnappagerðar ákvarðar hvernig hnappurinn hegðar sér.



Breyta hnappinn.

1. Veldu
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Gerð hnapps**.
4. Veldu hnappa tegund úr listanum:

- **Venjulegur** — getur verið með tákn, merki, skilaboð og aðgerðir. Sjálfvalin aðgerð er tala / setja inn skilaboð.
- **Spá** — sér fyrir næsta orð miðað við núverandi samsetningu í skilaboðaglugganum. Veldu hnappinn til að setja inn núverandi sýnilegt orð í skilaboðagluggann.
- **Lyklaborð** — hnappar hannaðir til að setja inn stakan staf í skilaboðaglugga og/eða svara ákvæðum eins og shift-lykli eða hástafalás rétt. Lyklaborðshnappar geta einnig spilað hljóð sem tekið var upp eða hljóðskrá þegar þeir eru valdir. Sjá kafla 9.6.3.2 Taka upp, síða 41 og 9.6.3.3 Bættu hljóðskrá við hnappaskilaboð, síða 41.
- **Beygingarlykill** — breytir markorði í sérstakt orðform t.d. fleirtölu, þátíð o.s.frv. Markið er sett á einn tveggja valmöguleika: síðasta orðið í skilaboðaglugganum eða allir málfræðihnappar.

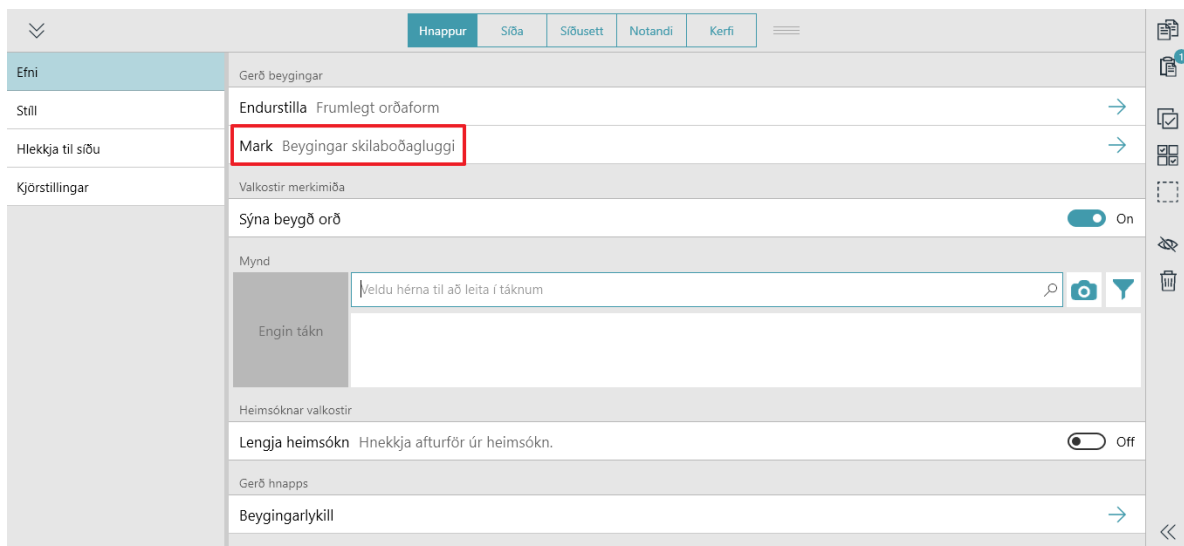

Stillingar málareglu hnapps þurfa að vera nákvæmlega eins og fyrir beygingarhnappinn og málfræðihnappinn til að beygingin virki rétt.

- **Málfræði** — uppfærir sitt eigið merki til að spá fyrir um málfræðilega rétt form sem óskað er eftir miðað við innihald skilaboðagluggans
- **Undanskilið efni** — (aðeins spænska) þegar fyllt er með viðeigandi fornafni er hægt að nota undanskilið efni hnappinn til að beygja málfræðihnappa og einnig setja merki sitt inn í skilaboðagluggann. Þegar hann er valinn einu sinni mun undanskilið efni hnappurinn beygja málfræðihnappa til að passa við fornafnið á hnappinum fyrir undanskilið efni. Ef hann er valinn aftur verður merkið (fornafnið) á hnappinum fyrir undanskilið efni sett í skilaboðagluggann.

Ef tungumálareglur undirskilins efnis hnappsins eru stilltar á spænsku (Mexíkó, Spánn eða Bandaríkin) gæti eitt af eftirfarandi fornöfnum verið notað á hnappinn:

- yo
- tú
- usted
- él
- ella
- nosotros
- nosotras
- vosotros
- vosotras
- ustedes
- ellos
- ellas



Stillingar málareglur hnapps þurfa að vera nákvæmlega eins og fyrir undirskilið efni hnappinn og málfræðihnappinn til að beygingin virki rétt.

9.7 Aðgerðir hnapps

Aðgerðir leyfa þér að búa til hnappa sem gera ákveðna hluti!

Bæta við eða breyta hnappa aðgerðum



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Bæta við aðgerð** til að velja aðgerð til að bæta við hnappinn. (Eingöngu fánlegt ef **Hnappagerð** er stillt á **Venjuleg**).



Sláðu inn í **Leita að aðgerðum** reitinn til að finna aðgerðir tengdar leitinni þinni. Fyrir frekari upplýsingar um hvað aðgerðirnar gera, veldu  upplýsingartáknið í kaflaheitinu.



Uppáhalds aðgerðirnar birtast fyrst í aðgerðarlistanum til að auðvelda aðgang. Veldu



útlínustjörmunu til

að bæta aðgerðinni á uppáhalds listann. Veldu



heilu stjörmunu til að fjarlægja aðgerðina af uppáhalds listanum.

Aðgerðir fyrir tal	Lýsing
Tala skilaboðaglugga	Tala innihald skilaboðagluggans.
Tala eða setja inn skilaboð	Tala eða setja inn skilaboð hnapps
Tala setningu	Tala síðustu setningu í skilaboðaglugganum.
Stöðva allt hljóð	Stöðva allt tal og hljóð sem er nú í spilun eða í bið í TD Snap®.

Aðgerðir fyrir skilaboðaglugga	Lýsing
Feitletrað	Gera valinn texta í skilaboðaglugga feitletraðan
Hreinsa skilaboðaglugga	Hreinsa innihald skilaboðagluggans.
Afrita texta í skilaboðaglugga	Afrita núverandi texta skilaboðaglugga á kerfisklippiborðið. [‡]
Afrita skilaboðaglugga á hnapp	Afrita núverandi texta skilaboðaglugga og bæta honum síðan við merki hnapps. [‡]
Klippa texta í skilaboðaglugga	Klippa núverandi texta í skilaboðaglugga á kerfisklippiborðið. [‡]
Eyða texta	Eyða völdum texta í skilaboðaglugga eða völdu orði í skilaboðaglugga.
Skáletrað	Gera valinn texta í skilaboðaglugga skáletraðan
Færa bendil	Færa bendil í skilaboðaglugga
Afrita klippiborð yfir á skilaboðaglugga	Líma innihald kerfisklippiborðsins í skilaboðagluggann.
Endurgera skilaboðaglugga	Endurgera síðustu aðgerð sem var afturkölluð í skilaboðaglugganum.
Veldu texta	Veldu texta í skilaboðaglugga.
Deila texta í skilaboðaglugga	Deila texta í núverandi skilaboðaglugga. [‡]
Víxla spjallham	Kveikja og slökkva á spjalli. Þegar spjall er virkjað er efni núverandi skilaboðaglugga sett í minni og síðan er glugginn hreinsaður. Á meðan þú ert í spjalli getur þú sett nýtt efni inn í skilaboðagluggann og talað. Þegar slökkt er á spjalli er efni skilaboðagluggans endurheimt úr minni þannig að þú getir haldið áfram þar sem þú varst áður.
Afturkalla skilaboðaglugga	Afturkalla síðustu aðgerðir í skilaboðaglugganum.
Orðasafnsleit	Sýna slóð að hnappi sem inniheldur textann í skilaboðaglugganum. Merktu leiðin er aðgengileg öllum aðgangsaðferðum. Fyrirspurnir í orðasafnsleit eru háð há- og lágstöfum.

[‡] „Núverandi texti“ segir til um valinn texta í skilaboðaglugganum eða ef ekkert er valið, allan textann í skilaboðaglugganum.

Aðgerðir fyrir yfirlit	Lýsing
Hætta við heimsókn	Hætta við heimsókn þannig að þú sért áfram á núverandi síðu.
Lengja heimsókn	Hnappur sem inniheldur þessa aðgerð virkjar ekki endursendingu á síðustu síðu á meðan heimsókn er í gangi.
Fara til baka	Fara til baka á síðustu síðu
Fara heim	Fara á heimasíðu.
Tengill	Tengja á aðra síðu.
Opna stjórnborð	Opna stjórnborðssíðu.
Opna lyklaborð	Opna síðu lyklaborðs.

Aðgerðir fyrir yfirlit	Lýsing
Opna veftöflu***	Opna veftöfluna.
Til baka úr heimsókn	Fara aftur á fyrri síðu, hætta við heimsókn.
Skipta síðusetti	Skipta yfir í annað síðuset.

***Sjá hluta 9.7.3 *Veftafla, síða 51*

Aðgerðir fyrir Boardmaker athafnir	Lýsing
Opna Boardmaker athöfn eða möppu †	Opna Boardmaker athöfn eða möppu sem TD Snap® síðu eða sem sprettiglugga.
Opna Boardmaker athafnasafnið †	Opna Boardmaker athafnasafnið í TD Snap®. Notandinn getur skoðað möppurnar og spilað athafnirnar í gegnum safnið. Boardmaker athafnasafnið er Snap athafnasafnsmappan á myBoardmaker.com
Opna núverandi Boardmaker athöfn †	Opnaðu Boardmaker athöfnina sem er í gangi, ef það á við.

† Þessi aðgerð þarfnast myBoardmaker.com aðgangs og tengds Boardmaker efnis. Sjá hluta 9.7.5 *Spila Boardmaker athafnir í TD Snap®, síða 54*

Aðgerðir fyrir hegðunarstuðning	Lýsing
Fyrst svo	Sýna fyrst, svo raðir við sprettiglugga.
Athafnaröð	Sýna athafnaröð í sprettiglugga.
Lýsing	Sýna lýsingu í sprettiglugga.
Sjónrænn tímavaki	Sýna tímavaka í efstu stikunni sem telur niður tiltekinn tíma.

Aðgerðir fyrir aðgangsaðferð	Lýsing
Fínstillta augnstýringu	Hefja fínstillingu augnstýringar.
Breyta aðgangsaðferð	Ef aðeins aðgangsaðferð 1 er stillt breytist aðgangsaðferðin í þá sem tilgreind er þegar hnappurinn er valinn. Ef bæði aðgangsaðferð 1 og aðgangsaðferð 2 eru stilltar, skiptir hnappurinn á milli aðgangsaðferðar 1 og aðgangsaðferðar 2. Hnappamerkið sýnir „Breyta í [aðgangsaðferð]“ til að gefa til kynna hvað mun gerast þegar hnappurinn er valinn.
Gera hlé á aðgangsaðferð	Gerir hlé á og ræsir aftur aðgangsaðferð. Texti á hnappamerki sýnir hvort aðgangsaðferðin sé í hléi eða hvort hún sé virk. Mögulegar aðgangsaðferðir: Músadvöl, augnstýring.
Stilla aðgangstíma	Stillir aðgangsaðferðartímabreytu á tilgreint gildi. Tímabreytan sem verður fyrir áhrifum ákvarðast af virku aðgangsaðferðinni þegar <i>Set Access Time action is activated</i> † Til dæmis gætirðu bætt aðgerðinni við þegar aðgangsaðferðin er stillt á Snerting en seinna virkjar notandinn hana með augnstýringaraðgangsaðferðinni til að breyta dvalartíma augntillits.
Sýna stöðu augnstýringar	Sýna stöðu rakningar glugga fyrir augnstýringu.
Víxlhnappur skjáborðsaðgangs	Víxla á milli skjáborðsaðgangs með augnstýringu TD Snap svæðisbundinnar augnstýringar. Á Windows tækjum er TD Control notað fyrir skjáborðsaðgang. Á iPad er AssistiveTouch notað fyrir skjáborðsaðgang.

† Listi yfir tímabreytur sem verða fyrir áhrifum frá Stilla aðgangstíma aðgerðinni.

Tafla 8: Aðgangstímagraf

Aðgangsaðferð	Tímabreyta sem verður fyrir áhrifum
Augnstýring með dvöl.	Dvalartími
Augnstýring með skiptirofa.	Skipta biðtíma
Augnstýring með blikki.	Lágmarks blikktími
Snerta Enter / Snerta Exit	Biðtími
1 rofa sjálfvirk skönnun	Skönnunarhraði

Aðgangsaðferð	Tímabreyta sem verður fyrir áhrifum
1 rofa skönnun	Gera hlé á tíma
1 rofa dvalarskönnun	Gera hlé á tíma
Öfug skönnun	Hraði
Músardvöl	Dvalartími
Snerting	Ekkert

Aðgerðir fyrir orðaforðasíu	Lýsing
Víxla orðaforðasíu	Víxla á milli kveikt eða slökkt á orðaforðasíu.

Aðgerðir fyrir hljóðstyrksstjórnun	Lýsing
Víxlaðu hljóði af hljóðsvörun	Taktu hljóðið af eða settu hljóðið á hljóðsvörun.
Styrkur hljóðsvörunar lækkaður	Lækkaðu styrk hljóðsvörunar.
Styrkur hljóðsvörunar hækkaður	Hækkaðu styrk hljóðsvörunar.
Stilla hljóðstyrk	Stilltu hljóðstyrkinn á ákveðið stig.
Víxlaðu tali af	Taktu hljóðið af eða settu hljóðið á kerfi.
Lækka hljóðstyrk tals	Lækkaðu hljóðstyrk kerfis.
Hækka hljóðstyrk tals	Hækkaðu hljóðstyrk kerfis.

Aðgerðir fyrir umhverfisstjórnun	Lýsing
Senda Google Assistant skipun	Senda textaskipun til Google Assistant. Valkostir: Senda skilaboðatexta hnapps eða senda texta í skilaboðaglugga.
Senda IR merki	Senda tiltekið IR merki.

Aðgerðir fyrir AccessIT	Lýsing
Tengja við AccessIT*	Aftengdu tengt AccessIT tæki og sýndu síðan AccessIT tækisveljara.
Endurstilla AccessIT*	Stöðvaðu tiltekna AccessIT aðgerðir: textaflutninga, haldna lyklaborðslykla, smelli og/eða samfelldar músahreyfingar.
Sendu hnappa texta*	Sendu merki eða skilaboð hnapps í AccessIT tækið.
Senda lyklaborðslykil*	Senda lyklaborðslykil til AccessIT tækisins.
Senda texta í skilaboðaglugga*	Senda núverandi texta í skilaboðaglugga til AccessIT tækisins. [‡]
Senda músasmell*	Senda músasmelli til AccessIT tækisins.
Senda músahreyfingu*	Senda músahreyfingar til AccessIT tækisins.
Senda texta*	Senda texta til AccessIT tækisins.

* Þessi aðgerð krefst Tobii Dynavox AccessIT 3 tæki. Sjá hluta 9.7.4 AccessIT, síða 52

‡ „Núverandi texti“ segir til um valinn texta í skilaboðaglugganum eða ef ekkert er valið, allan textann í skilaboðaglugganum.

Aðgerðir fyrir margmiðlunarefni	Lýsing
Spilaðu YouTube myndband [§]	Spilaðu tilgreint YouTube myndband í innbyggða aðgengilega spilaranum. Valkostir: Þegar myndbandinu er lokið, spilaðu annað hvort næsta myndband sjálfkrafa á TD Snap® síðu, loka YouTube spilaranum eða gera ekkert. Klipptu myndband (tilgreindu upphafs- og/eða lokatíma). Aðeins er hægt að skoða klippt myndbönd innan tilgreinds tímabils.

§Sjá hluta 9.7.7 Spila YouTube myndbönd í TD Snap®, síða 58

Aðgerðir fyrir Ræsa önnur forrit	Lýsing
Ræsa forrit	Ræsa tiltekið forrit. [¶]

*Fyrir ráðleggingar um notkun flýtleiðaforritsins, sjá kaflann 9.7.6 Ræsa Apple flýtleiðir úr TD Snap® (aðeins fyrir iPadOS), síða 58.

Aðgerðir fyrir tæki	Lýsing
Smækka	Smækka TD Snap® appið.
Endurræsa tæki	Endurræsir tækið.
Slökkva á tæki	Slekkur á tækinu.
Víxla heilskjásstillingu	Víxla heilskjásstillingu yfir á kveikt eða slökkt fyrir tækið.

Aðgerðir fyrir Félagaglugga	Lýsing
Félagaglugga birtustig lækkað**	Dregur úr birtustigi félagaglugga.
Félagaglugga birtustig hækkað**	Eykur birtustig félagaglugga.
Víxla straum félagaglugga**	Víxla straum af og á félagaglugga.

** Þessi aðgerð krefst Tobii Dynavox I-13 , I-16 eða TD Pilot tækis.

9.7.1 Eyða aðgerð



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu  **Eyða** hnappi við hlið aðgerðar.
4. Veldu rauða **Eyða** hnappinn til að staðfesta eyðingu.


9.7.2 Endurraða aðgerðum hnapps



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.



3. Veldu og haltu niðri haldi aðgerðar, dragðu hana síðan í nýja stöðu á lista yfir aðgerðir.

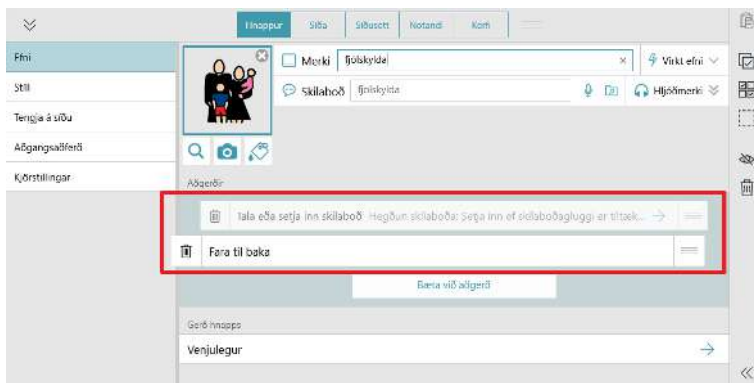


9.7.3 Veftafla



Veftafla er aðeins tiltæk með snertiaðgangsaðferðinni.

Veftaflan er svæði þar sem þú getur sýnt myndir og búið til teikningar fríhendis. Búðu til eins margar töflur og þú vilt. Þær munu viðhaldast þar til þú eyðir þeim.

Til að opna veftöflu skal nota Opna veftöflu aðgerðina á hnappi. Í mörgum síðusettum er Opna veftöflu hnappur fáanlegur á stjórnborðssíðunni.

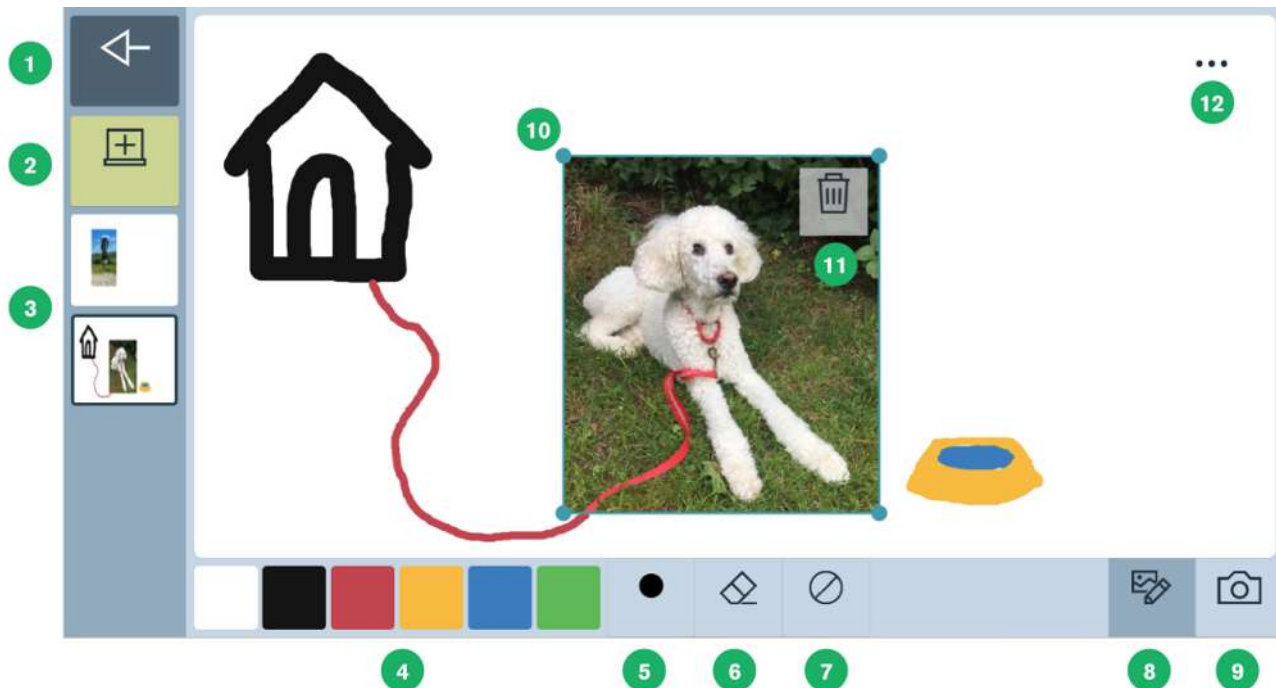

1. **Til baka** — Fara til baka á síðusett.
2. **Ný veftafla** — Búðu til nýja veftöflu.
3. **Listi yfir veftöflur sem þegar eru til** — Veldu hvaða veftöflu sem er til að skoða og breyta.
4. **Teiknisþjald** — Veldu hvaða lit sem er og teiknaðu síðan fríhendis á veftöfluna.
5. **Þykkt** — Veldu þykkt teikniverkfæri.
6. **Strokleður** — Strokaðu út teikningar á ákveðnum svæðum.
7. **Hreinsa** — Hreinsaðu allar teikningar af núverandi veftöflu.
8. **Breyta myndum** — Endurstaðsettu, breyttu stærð eða eyddu myndum af veftöflunni..
9. **Bæta við mynd** — Bættu mynd við veftöfluna. Notaðu innbyggðu myndavélina þína til að taka myndir eða leita að mynd sem geymd er á tækinu þínu.
Aðgerðir fyrir Bæta við mynd
 - Taktu mynd
 - Veldu mynd — Athugið: Eingöngu er hægt að fara á samtalsgluggann fyrir þessa aðgerð með Snertingu.
 - Hætta við
10. **Velja mynd** — Smelltu og dragðu frá miðju myndar til að endurstaðsetja. Smelltu og dragðu á horni til að breyta stærð.
11. **Eyða mynd** — Eyddu valinni mynd.
12. **Meira** - Opnaðu valmynd sem inniheldur eftirfarandi valkosti:
Eyða veftöflu — Eyddu núverandi veftöflu.
Deila - Deildu eða vistaðu núverandi töflu sem .jpeg mynd.
Hætta við - Lokaðu Meira valmyndinni.

9.7.4 AccessIT

TD Snap® styður Tobii Dynavox AccessIT 3, USB Bluetooth tæki sem er notað til að senda lyklaborðsinnslið, músahreyfingar og músasmelli í venjulega Windows 10 tölvu úr tæki sem notar Tobii Dynavox TD Snap® forritið. Til að fræðast frekar um Tobii Dynavox AccessIT 3 skaltu fara á <http://www.tobiidynavox.com/AccessIT>



AccessIT síður fylgja með í Core First síðusettum sem búnar eru til með TD Snap® útgáfu 1.7 eða nýrri. AccessIT síðubúnt eru tiltæk til innflutnings inn í núverandi síðusett þín á <https://www.mytobiidynavox.com/PagesetCentral>



Héðan í frá í þessu skjali verður vísað til tölvunnar sem fær skipanir sem „tölvun“ og tækisins sem skipanirnar verða sendar frá sem „tjáskiptatækið“.



AccessIT 3 notar Bluetooth® þráðlausa tækni. Minna en 10 metrar (32 fet) þurfa að vera á milli tölvunnar (með tengdu AccessIT 3) og tjáskiptatækisins til að koma á og viðhalda Bluetooth þörun á meðan að AccessIT 3 er í notkun.

Kveikt þarf að vera á bæði tjáskiptatækinu og tölvunni og tækin aflæst áður en byrjað er á skrefunum hér að neðan.

9.7.4.1 Settu upp AccessIT

Tengdu við AccessIT

1. (Á tölvunni) Settu AccessIT 3 í USB tengi.



AccessIT 3 þarfnast USB 2.0 eða hærra.

Virkja Bluetooth

Windows tjáskiptatæki

1. (On the speech device) Veldu **Start** valmynd, veldu síðan **Settings**.
2. Veldu **Devices**.
3. Veldu **Bluetooth**.
4. Færðu **Bluetooth** í KVEIKT stöðu.

iPadOS (iPad) tjáskiptatæki

1. (On the speech device) Farðu á **Settings > Bluetooth** og virkjaðu Bluetooth.

9.7.4.2 AccessIT aðgerðir

AccessIT aðgerðir eru hannaðar til að vera notaðar saman. Algengar tölvuaðgerðir eins og smella og draga munu krefjast meira en einnar aðgerðar. Einstökum aðgerðum er lýst hér að neðan.



Ef AccessIT tæki er ekki tengt þegar hnappur með AccessIT aðgerð er valinn, mun (aðgengilegt) AccessIT tækisveljari opnast sjálfvirk.

Tafla 9: AccessIT aðgerðir

Aðgerð	Lýsing
Tengja við AccessIT	Aftengdu núverandi AccessIT tæki (ef einhver) og sýndu AccessIT tækisveljara. Þessi aðgerð er gagnleg við að skipta frá einu AccessIT tæki yfir í annað AccessIT tæki. Ekki er nauðsynlegt að nota þessa aðgerð til að ræsa allar AccessIT lotur, þar sem allar AccessIT aðgerðir opna sjálfvirk AccessIT tækisveljara ef AccessIT tæki er ekki tengt.
Endurstilla AccessIT	Stöðvaðu tiltekna skipanagerðir sem er verið að framkvæma: lyklaborðslyklar, músasmellir, músahreyfingar og/eða texta.
Sendu hnappa texta	Sendu hnappa texta til AccessIT tækis. Ef hnappurinn er ekki með texta, sendirðu merki hnappsins.
Senda lyklaborðslykil	Senda tiltekin lyklaborðslykil. Valkostir: haltu lyklinum niður og/eða bíddu í tiltekinn tíma eftir að þú sendir lyklaborðslykla (áður en þú framkvæmir næstu aðgerðir).
Senda texta í skilaboðaglugga	Senda núverandi texta í skilaboðaglugga til AccessIT tækisins. Ef skilaboða-glugginn er táknmyndaður eru táknin ekki send.
Senda texta	Sendu tiltekin texta til AccessIT tækis.
Senda músarsmell	Sendu tiltekna smellgerð (vinstri smellur, hægri smellur, miðsmellur, vinstri tvísmellur). Valkostir: Bíddu í tiltekinn tíma eftir að þú sendir smellinn (áður en þú framkvæmir næstu aðgerð) og/eða heldur smellinum niðri.

Aðgerð	Lýsing
Senda músahreyfingu	Senda músahreyfingu til AccessIT tækisins. Músahreyfingar eru gerðar frá núverandi staðsetningu músarinnar. Færðu bláu kúluna í þá stöðu hringsins sem passar við átt ákjósanlegrar músahreyfingar, settu síðan inn tölu í fjarlægðarreitinn. Fjarlægðareining er minnsta skynjanlega músahreyfingin, sem er á milli 1/300 og 1/200 af tommu, en það fer eftir búnaðinum og músahraðastillingar á tölvunni. Valkostir: samfelld hreyfing (músin heldur áfram að fara í tiltekna átt þangað til önnur aðgerð stöðvar/endurbeinir henni eða hún endar á brún skjásins) og/eða bíður í tiltekinn tíma eftir að þú sendir músahreyfinguna (áður en þú framkvæmir næstu aðgerð).



Skýringamynd 31: Mouse movement direction — Position the blue ball on the circle to set the mouse movement direction.



Sumum AccessIT notendum gæti fundist það gagnlegt að virkja Windows-stillinguna „Sýna staðsetningu bendils þegar ég ýti á CTRL lykil“ á tölvunni. Notaðu Senda lyklaborðslykil aðgerðina til að senda CTRL lyklaborðslykil frá TD Snap® og kvikaðir hringir munu birtast tímabundið umhverfis músabendilinn á tölvunni til að gera hann sýnilegri. Til að fara í þessa Windows músastillingu skaltu fara í *Settings > Devices > Mouse > Additional Mouse Options > Pointer Options tab*.

9.7.4.3 Tölvu orkustillingar og AccessIT

Tölvun getur aðeins mótttekið AccessIT skipanir þegar kveikt er á henni og hún er ekki í hvíld. Til að tryggja ótruflaðan tölvuaðgang, skaltu breyta orkustillingum tölvunnar þannig að hún setji tölvuna (harða diskinn) aldrei í hvíldarstöðu á meðan hún er í sambandi.

Tölvun getur ennþá mótttekið AccessIT skipanir þó að skjáinn hafi farið í orkusparnaðarham. Þegar AccessIT skipun (lyklaborðslykill, músahreyfing, eða músasmellur) er send úr TD Snap® mun það „vekja“ tölvuskjáinn.

Orkustillingar Windows má finna í *Stillingar > Kerfi > Orka og hvíld*.

9.7.5 Spila Boardmaker athafnir í TD Snap®

Boardmaker athafnir eru gagnvirkar og prentefni hannað til fræðslu, tjáskipta og fjörs! Þú getur líka skoðað og spilað Boardmaker athafnirnar beint í TD Snap®. Notaðu opna Boardmaker safnaaðgerðina til að skoða og spila athafnir. Eða notaðu opna Boardmaker athafnirnar eða möppurnar til að fara beint í ákveðna athöfn eða möppu. Þú getur einnig gert athafnir aðgengilegar án nettengingar.




Boardmaker athafnir sem eru spilaðar í TD Snap® eru hannaðar fyrir heimanotkun, þar sem umönnunaraðili sér um Tobii Dynavox aðganginn fyrir bæði TD Snap® og myBoardmaker. Umönnunaraðilinn í þessu tilviki mun hafa beinan aðgang að Boardmaker athafnamöppu þar sem hann getur sett inn Boardmaker athafnir fyrir notandann.

Í kennslustofu eða meðferðarsamhengi, þar sem kennari eða meðferðaraðili úthlutar Boardmaker athöfnum, ætti nemandinn að ljúka verkefnunum með því að nota Boardmaker 7 Student Center forritið. Boardmaker 7 Student Center forritið er ókeypis að setja upp og nota og er samhæft með flestum tækjum sem styðja TD Snap®. Nemandinn mun líklegast þurfa sérstaka innskráningu frá kennaranum til að fá aðgang að verkefnunum sínum í Boardmaker 7 Student Center forritinu.



Sumar Boardmaker stillingar og aðgerðir eru ekki studdar í TD Snap®. Sjá notendaleiðbeiningarnar fyrir Boardmaker 7 fyrir listann af óstuddum eiginleikum.

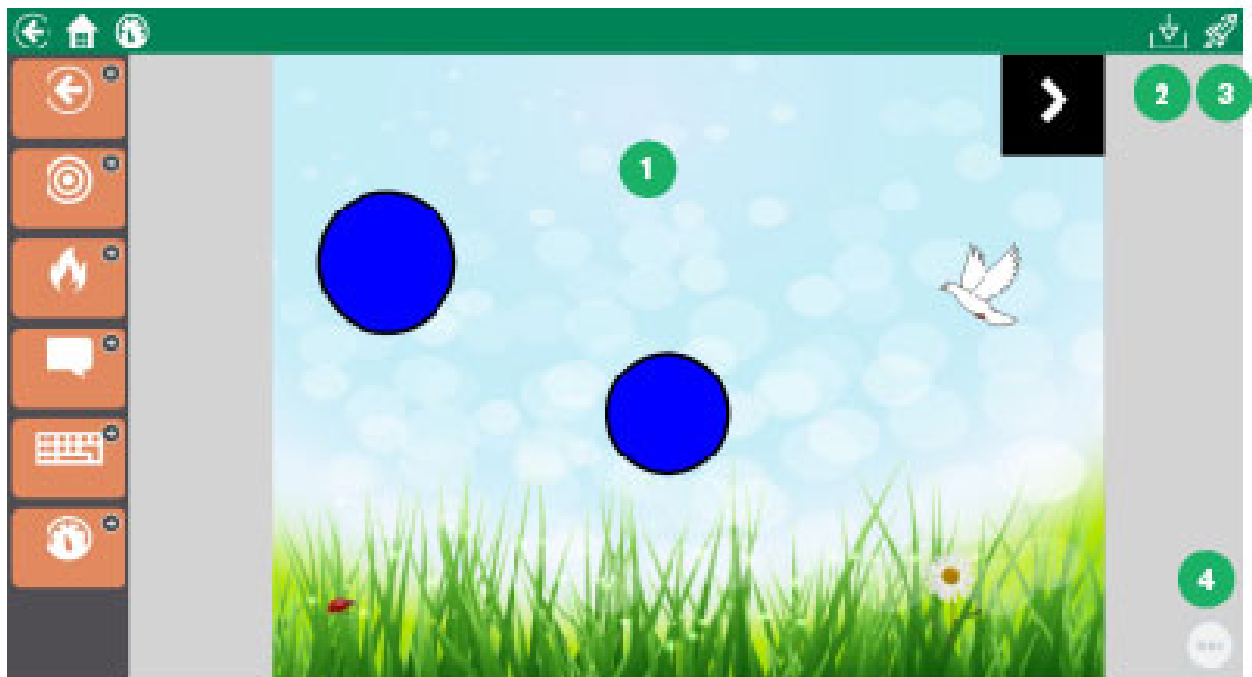

Skýringamynd 32: Boardmaker athöfn í gangi í TD Snap®

	Hlutur	Lýsing
1	Athöfn	Boardmaker athafnirnar spilast sjálfkrafa á aðalsíðu TD Snap® svæðisins. Þú getur einnig spilað Boardmaker athafnir í sprettiglugga ef þú heimilar <i>Spila í sprettiglugga</i> þegar þú bætir einni athöfninni í Boardmaker athöfnunum á hnapp.
2	Stjórnaðu aðgengi án nettengingar	Veldu athafnir í þessum glugga til að hlaða niður og gera aðgengilegar án nettengingar. Hægt verður að spila vöðu athafnirnar án nettengingar í TD Snap®.
3	Fara í myBoardmaker	Ræsa myBoardmaker.com í vafraglugga.
4	Boardmaker athafnarvalmyndartákn	Opnaðu Boardmaker athafnarvalmyndina til að nálgast eftirfarandi hnappa: • Til baka — Farðu úr athöfninni og snúðu aftur á fyrri síðu. • Safn — Farðu á Boardmaker safnið í TD Snap®. • Endurræsa — Byrjaðu upp á nýtt í núverandi athöfn. • Færa — Færðu Boardmaker athafnarvalmyndatáknið í annað horn á skjánum.

9.7.5.1 Stilltu athafnir á Boardmaker Online

Til að gera Boardmaker athafnir aðgengilegar í TD Snap® verður þú að vera með aðgang á myBoardmaker.com. Aðgangar á Community stigi eru ókeypis. Farðu inn á myBoardmaker.com og skráðu þig inn með Tobii Dynavox aðgangsupplýsingunum sem þú notar í TD Snap® til að búa til ókeypis myBoardmaker Community aðgang.



Vefsíðan myBoardmaker er, eins og er, eingöngu á ensku. Hins vegar eru Boardmaker athafnir aðgengilegar á mörgum tungumálum.



Áður en þú byrjar skaltu athuga að þú hafir nettengingu og sért skráð/ur inn á Tobii Dynavox aðganginn þinn í TD Snap®.

1. Inni í TD Snap®, veldu **Stjórnborð** og veldu síðan **Boardmaker athafnir** hnappinn.

Ef þú ert ekki með Boardmaker athafnahnappinn á stjórnborðinu þínu geturðu búið til hnapp með opna Boardmaker athafnasafn aðgerðinni, veldu síðan þann hnapp í notkunarham. Þegar opna Boardmaker athafnasafn aðgerðin er notuð í fyrsta skipti býr það til nauðsynlegar möppur á Boardmaker Online aðganginum þínum.

2. Opnaðu vefvafrá og farðu á myBoardmaker.com
3. Veldu **Skrá inn**, stimplaðu síðan inn Tobii Dynavox aðgangsorðin þín. Ef þú hefur ekki skráð þig inn á myBoardmaker.com áður, verður þú að nýskrá þig fyrir ókeypis Community aðgang eða hefja áskrift.
4. Veldu **Minn Boardmaker**.
5. Veldu möppuna **Snap athafnir**.
6. Bættu athöfnum og möppum við Snap athafnamöppuna til að gera þær aðgengilegar í gegnum aðgerðirnar í TD Snap®.



Snap aðgerðarmappan er forhlaðin með mörgum fríum athöfnum til að hjálpa þér að byrja. Sumar af vinsælustu athöfnunum eru reiknivélin, teningur, og lukkuhjóla athafnir sem finna má í stærðfræðitóla möppunni.



Snap aðgerðarmappan á myBoardmaker er Boardmaker athafnasafnið í TD Snap®.

9.7.5.2 Opna Boardmaker athafnasafnið.

Notið þessa aðgerð til að leyfa notandanum að skoða allar Boardmaker athafnirnar í Snap athafnamöppunni á myBoardmaker beint í TD Snap®. Í gegnum Boardmaker athafnasafnið getur hann valið sér athöfn til að spila.



Allar athafnir í safninu eru aðgengilegar til að spila ef það er virk nettenging á tækinu. Án nettengingar er eingöngu hægt að spila athafnir sem þegar er búið að hlaða niður eða sem eru í minninu. Sjá kafla 9.7.5.5 *Boardmaker athafnir, aðgengi án nettengingar*, síða 57.

1. Farðu á síðu þar sem þú vilt hafa hnapp sem tengist Boardmaker athafnasafninu þínu.



2. Veldu **Breyta** hnappinn.
3. Veldu hnappinn sem þú vilt nota til að opna Boardmaker athafnasafnið.
4. Veldu **Bæta við aðgerð**.
5. Skrúnaðu niður í Boardmaker athafnasafnshlutann og veldu **Opna Boardmaker athafnasafn**.

9.7.5.3 Opna Boardmaker athöfn

Spilaðu ákveðna athöfn í Boardmaker safninu.



Allar athafnir í safninu eru aðgengilegar til að spila ef það er virk nettenging á tækinu. Án nettengingar er eingöngu hægt að spila athafnir sem þegar er búið að hlaða niður eða sem eru í minninu. Sjá kafla 9.7.5.5 *Boardmaker athafnir, aðgengi án nettengingar*, síða 57.

1. Farðu á síðuna sem þú vilt tengja hnapp við sem leiðir á Boardmaker athöfnina.



2. Veldu **Breyta** hnappinn.
3. Veldu hnappinn sem þú vilt nota til að opna Boardmaker athöfnina.
4. Veldu **Bæta við aðgerð**.
5. Skrúnaðu niður í Boardmaker athafnasafnshlutann og veldu **Opna Boardmaker athafnasafn**. Snap aðgerðarsíðan mun opnast.
6. Flettu í gegnum möppurnar og finndu athöfnina sem þú vilt spila. Veldu athöfnina.
7. Ef þú vilt að athöfnin opnast í sprettiglugga, virkjaðu **Opna í sprettiglugga**. Annars mun athöfnin opnast sem síða í TD Snap®.

Athafnir sem eru opnaðar í sprettiglugga leyfa notandanum ekki að fara úr glugganum og koma til baka á sama stað og áður. Sprettigluggar er best að nota fyrir stuttar athafnir sem auðvelt er að endurræsa frá byrjun.

8. Veldu **Velja athöfn**. Til að hætta án þess að vista, veldu **Hætta við**.



Merki hnappsins uppfærast sjálfkrafa með nafni tengdu athafnarinnar.

9.7.5.4 Opna Boardmaker möppur

Opnaðu ákveðna möppu í Boardmaker safninu þínu. Notandinn getur valið athafnir til að spila í TD Snap® frá möppunni.



Þú getur úthlutað Boardmaker athöfnum til notandans með því að búa til möppu fyrir hann í Snap athafnamöppunni á myBoardmaker.com og tengjast síðan möppunni í TD Snap® síðusettingu þeirra. Færðu athafnir yfir í möppuna eftir þörfum og notandinn mun sjá athafnirnar á TD Snap® (notandinn verður að hafa nettengingu og að vera skráður inn á myTobiiDynavox aðganginn sinn í TD Snap® til að fá uppfærðar athafnir).



Allar athafnir í safninu eru aðgengilegar til að spila ef það er virk nettenging á tækinu. Án nettengingar er eingöngu hægt að spila athafnir sem þegar er búið að hlaða niður eða sem eru í minninu. Sjá kafla 9.7.5.5 *Boardmaker athafnir, aðgengi án nettengingar*, síða 57.

1. Farðu á síðuna sem þú vilt tengja hnapp við sem leiðir á Boardmaker athöfnina.



2. Veldu **Breyta** hnappinn.

3. Veldu hnappinn sem þú vilt nota til að opna Boardmaker möppuna.

4. Veldu **Bæta við aðgerð**.

5. Skrunaðu niður í Boardmaker athafnasafnshlutann og veldu **Opna Boardmaker athafnasafn**. Snap aðgerðarsíðan mun opnast.

6. Farðu í möppuna sem þú vilt tengjast, þannig að þú sért innan viðeigandi möppu.

7. Veldu **Velja möppu**. Til að hætta án þess að vista, veldu **Hætta við**.



Merki hnappsins uppfærast sjálfkrafa með nafni tengdu möppunnar.

9.7.5.5 Boardmaker athafnir, aðgengi án nettengingar

Þú getur hlaðið niður Boardmaker athöfnum á tækið sem þú kýst til að þær séu aðgengilegar til að spila þegar tækið er ekki nettengt.



Athöfnum án nettengingar er hlaðið niður á hvert tæki. Ef að síðusetting er samstillt eða deilt á annað tæki þarf að endurtaka niðurhalsferlið á því tæki til að gera athöfnina aðgengilega án nettengingar.

1. Opnaðu Boardmaker safnið þitt í TD Snap®. Sjá kafla 9.7.5.2 *Opna Boardmaker athafnasafnið*, síða 56.

2. Opnaðu möppu til að sjá lista yfir athafnirnar.



3. Veldu **Stjórnaðu aðgengi án nettengingar**

4. Hakaðu við boxið við hliðina á athöfninni sem þú vilt hlaða niður á tækið þitt fyrir spilun án nettengingar.

Á athöfnum sem sýna  tákn er heppnaðist að hlaða niður og er athöfnin aðgengileg á þessu tæki án nettengingar.

5. Veldu **X** til að loka glugganum þegar þú hefur klárað að hlaða niður athöfnum úr þessari möppu.

6. Endurtaktu skrefin að ofan í hverri möppu sem inniheldur athafnir sem þú vilt geta notað án nettengingar.



Þegar athöfn sem er ekki merkt til notkunar án nettengingar er spiluð þegar það er nettenging, er henni hlaðið niður sem tímabundinni skrá. Af þeirri ástæðu verður hægt að spila sumar athafnir án nettengingar, sem áður hafa verið spilaðar en eru ekki merktar sérstaklega sem aðgengilegar án nettengingar. Aðgengi þessara athafna er ekki tryggt.

9.7.5.6 Opna Boardmaker athöfnina sem er í gangi

Ef að notandinn er að spila Boardmaker athöfn í TD Snap® og fer út úr athöfninni yfir á aðra síðu getur hann farið aftur í Boardmaker athöfnina á sama stað og áður.



Þessi aðgerð er bara möguleg með athafnir sem spilaðar eru í aðal TD Snap® glugganum. Þetta virkar ekki þegar athafnir eru opnaðar í sprettiglugga.

1. Farðu á síðuna sem þú vilt tengja hnapp við sem leiðir aftur á Boardmaker athöfnina sem er í gangi.



2. Veldu **Breyta** hnappinn.

3. Veldu hnappinn sem þú vilt nota til að fara á Boardmaker athöfnina sem er í gangi.
4. Veldu **Bæta við aðgerð**.
5. Skrunaðu niður í Boardmaker athafnarsafnshlutann og veldu **Opna Boardmaker athafnasafn**.



Ef það er engin Boardmaker athöfn í gangi verður hnappurinn sjálfkrafa óvirkur. Þegar Boardmaker athöfn er í gangi verður hnappurinn sjálfkrafa virkur og miðinn sýnir nafn og smámynd athafnarinnar.

9.7.6 Ræsa Apple flýtleiðir úr TD Snap® (aðeins fyrir iPadOS)

Þú getur ræst flýtleiðir úr TD Snap® með því að nota aðgerðina „Ræsa forrit“.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnappinn sem þú vilt nota til að ræsa flýtleiðaforritið.
3. Veldu **Bæta við aðgerð**.
4. Veldu **Flýtleiðir**.

Valkostur 1: Ef þú bætir ekki við neinum ítarlegum breytum mun aðgerðin ræsa flýtleiðaforritið þar sem þú getur valið flýtleiðina sem þú vilt keyra.

Valkostu 2: Veldu **Ítarlegt** tog tilgreindu síðan flýtleið til að keyra og (valfrjálst) innsláttar- og textafæribreytur í reitnum Skipanalínufæribreytur.

`name=[name] &input=[input] &text=[text]`

nöfn: Nafn flýtleiðarinnar sem á að keyra.

inntak (valfrjálst): Upphafleg innsláttur í flýtleiðina. Það eru tveir innsláttarmöguleikar: textastrengur eða klippiborð. Þegar inntaksgildið er textastrengur er sá texti notaður. Þegar inntaksgildið er klippiborðið er innihald klippiborðsins notað.

texti (valfrjálst): Ef inntak er stillt á texta, þá er gildi textabreytunnar send sem inntak í flýtleiðina. Ef inntak er stillt á klippiborð, þá er þessi breyta hunsuð.

Til dæmis, ef þú vilt keyra flýtleiðina Orð dagsins, myndir þú bæta eftirfarandi við í Röksemdir í skipanalínu:


`name=Word of the Day`

Ábending: Þú getur forritað flýtleiðir til að fara aftur til TD Snap® sjálfkrafa eftir að þeir keyra. Í Flýtleiðaforritinu skaltu breyta flýtleiðinni og bæta við aðgerðinni Opna forrit aftast á aðgerðalistanum. Ýttu á breytuna App í aðgerðinni og veldu TD Snap®.

9.7.7 Spila YouTube myndbönd í TD Snap®

Þú getur spilað YouTube myndbönd í TD Snap® með því að nota Play YouTube Video aðgerðina. TD Snap® Innbyggði YouTube spilarinn er aðgengilegur með öllum aðgangsaðferðum.

Athugaðu: Wi-Fi tenging er nauðsynleg til að spila YouTube myndbönd.

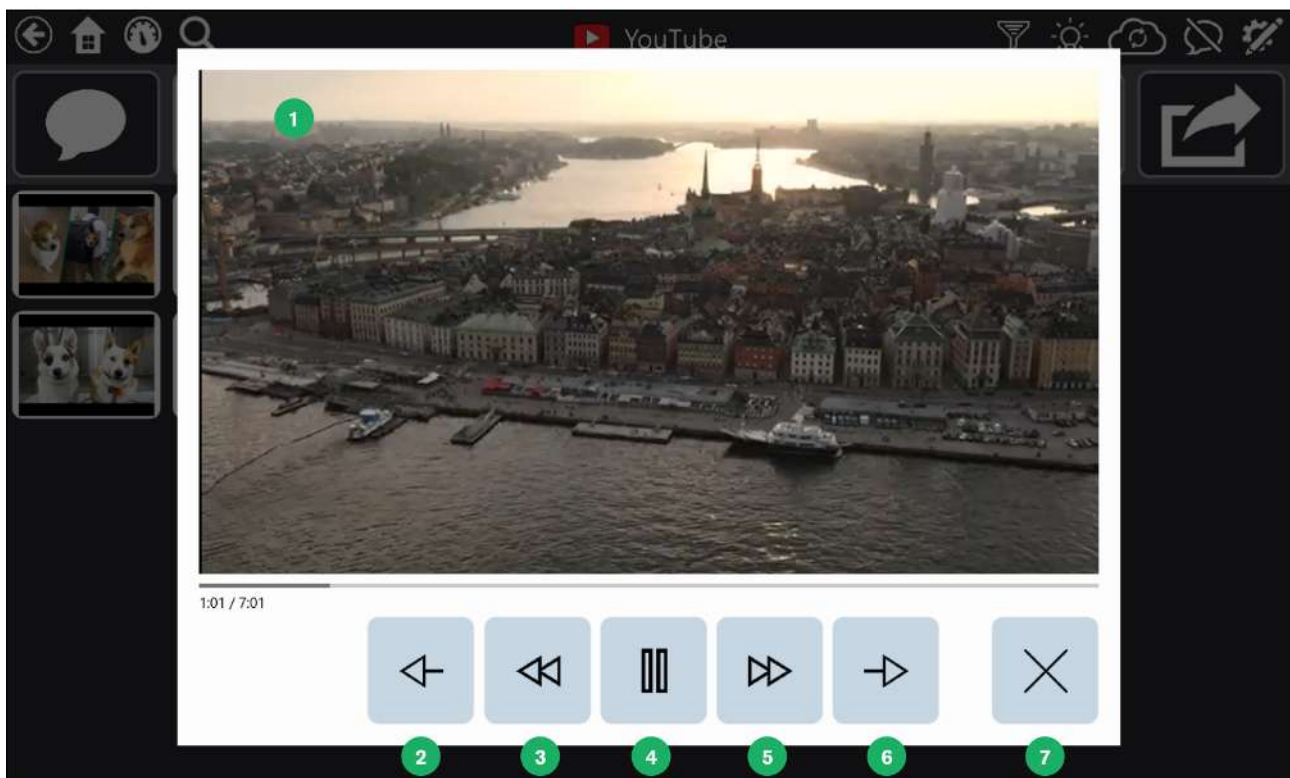


Skýringamynd 33: TD Snap® Integrated YouTube Player

	Hlutur	Lýsing
1	YouTube myndband	YouTube myndbandið birtist hér og byrjar að spila sjálfkrafa.
2	Fyrri myndband	Farðu í fyrri myndbandið á síðunni. TD Snap®
3	Færa til baka	Slepptu 30 sekúndum aftur.
4	Gera hlé/spila	Gerðu hlé eða spilaðu myndbandið.
5	Hoppaðu á undan	Slepptu 30 sekúndum á undan.
6	Næsta myndband	Farðu á næsta myndbandið á síðunni TD Snap®.
7	Loka	Lokaðu YouTube spilaranum.

Til að búa til myndspilunarlista í TD Snap® skaltu bæta við Play YouTube Video aðgerðinni á marga hnappa á einni síðu. Ef þú vilt að allur lagalistinn spilist sjálfkrafa skaltu virkja valkostinn „Spilaðu næsta myndband sjálfkrafa“ á hverjum hnappi. YouTube spilunarlistar eru ekki studdir.

9.8 Stíll hnapps

Breyttu útliti hnappsins í hnappastílflokknum.

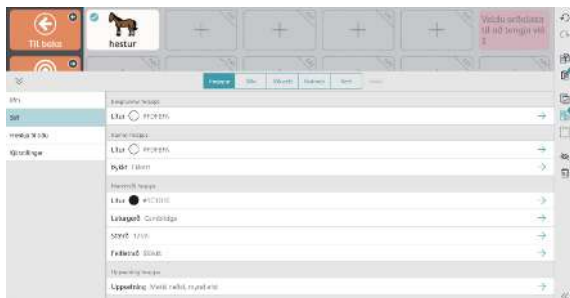

9.8.1 Bakgrunnur hnapps



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Litur** undir bakgrunni hnapps.
5. Veldu lit.



Þú getur búið til þína eigin sérsniðnu liti! Sjá kafla 9.19 Sérsniðnir litir, síða 76.

9.8.2 Rammi hnapps

9.8.2.1 Litur ramma



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Litur** undir hnapparammi.
5. Veldu lit.



Þú getur búið til þína eigin sérsniðnu liti! Sjá kafla 9.19 Sérsniðnir litir, síða 76.

9.8.2.2 Þykkt ramma



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Þykkt** undir hnapparammi.
5. Veldu þykkt ramma — enginn, mjór, meðal eða þykkur. Þú getur líka stillt sérsniðna þykkt með því að nota sleðann eða með því að slá inn tölugildi á milli 0 og 12 í reitinn Sérsniðin þykkt.



Skýringamynd 34: Rammi hnapps: Enginn, mjór, meðal og þykkur.

9.8.3 Merki hnapps

9.8.3.1 Litur



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Litur** undir merki hnapps.
5. Veldu lit.



Þú getur búið til þína eigin sérsniðnu liti! Sjá kafla 9.19 *Sérsniðnir litir*, síða 76.

9.8.3.2 Leturgerð



Sjálfvalin stilling er stillt inn á síðusettsflípanum. Ef þú vilt hunsa sjálfvaldar stillingar síðusettsins í þessu tilviki, skaltu stilla jafna síðusettt á **Slökkt**. Til að samstillja þessar stillingar með afganginum af síðusettinu, stillirðu jafna síðusettt á **Kveikt**.



Breyta hnappinn.

1. Veldu
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Leturgerð** undir merki hnapps.
5. Veldu leturgerð.

9.8.3.3 Stærð



Sjálfvalin stilling er stillt inn á síðusettsflípanum. Ef þú vilt hunsa sjálfvaldar stillingar síðusettsins í þessu tilviki, skaltu stilla jafna síðusettt á **Slökkt**. Til að samstillja þessar stillingar með afganginum af síðusettinu, stillirðu jafna síðusettt á **Kveikt**.



Breyta hnappinn.

1. Veldu
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Stærð** undir merki hnapps.
5. Veldu stærð.

9.8.3.4 Feitletrað



Sjálfvalin stilling er stillt inn á síðusettsflípanum. Ef þú vilt hunsa sjálfvaldar stillingar síðusettsins í þessu tilviki, skaltu stilla jafna síðusettt á **Slökkt**. Til að samstillja þessar stillingar með afganginum af síðusettinu, stillirðu jafna síðusettt á **Kveikt**.



Breyta hnappinn.

1. Veldu
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Feitletrað** undir merki hnapps.
5. Settu feitletrun á **Kveikt** eða **Slökkt**.

9.8.4 Uppsetning hnappa



Sjálfvalin stilling er stillt inn á síðusettsflípanum. Ef þú vilt hunsa sjálfvaldar stillingar síðusettsins í þessu tilviki, skaltu stilla jafna síðusettt á **Slökkt**. Til að samstillja þessar stillingar með afganginum af síðusettinu, stillirðu jafna síðusettt á **Kveikt**.



Breyta hnappinn.

1. Veldu
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Uppsetning** undir Uppsetning hnapps.
5. Veldu uppsetningu úr listanum.




Merki efst, mynd neðst




Merki neðst, mynd efst




Merki vinstri, mynd hægri

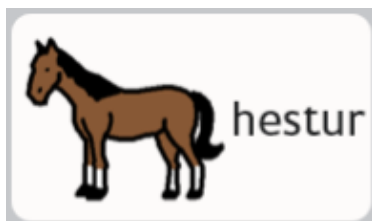

Merki hægri, mynd vinstri

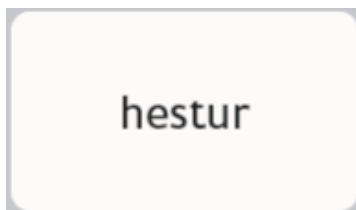

Aðeins merki

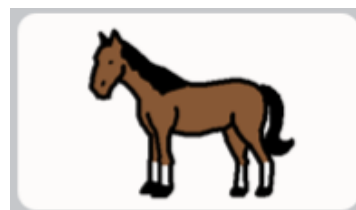

Aðeins mynd

9.8.5 Sjónrænn hnappahlekkur

 Sjálfsvalin stilling er stillt inn á síðusettsflípanum. Ef þú vilt hunsa sjálfvaldar stillingar síðusettsins í þessu tilviki, skaltu stilla jafna síðusett á **Slökkt**. Til að samstillja þessar stillingar með afganginum af síðusettinu, stillirðu jafna síðusett á **Kveikt**.

Stilltu sjónrænan hlekk stíl fyrir valinn hnapp.



Breyta hnappinn.

1. Veldu
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Sjónrænn hlekkur** undir hnappi Sjónrænn hlekkur.
5. Veldu stíl sjónræns hlekks af listanum.

Tafla 10: Stílar sjónræns hlekks

Engin	Ekki sýna sjónrænan hlekk.	
Yfirlitstákn	Lítið tákn birtist í horni hnappsins sem sýnir hvað hann gerir (tengill á aðra síðu, heimsækja síðu, eða fara til baka)	

Mappa fyrir hlekk	Tenglahnappur er í laginu eins og mappa. Stíll á aðeins við um tenglahnappa, ekki fara til baka eða heimsækja hnappa.	
Hornflipi fyrir hlekk	Hlekkhnappur hefur gráan þríhyrning í einu horninu. Stíll á aðeins við um tenglahnappa, ekki fara til baka eða heimsækja hnappa.	

9.9 Tengja á síðu / búa til nýja síðu

Tenglahnappur opnar nýja síðu þegar hann er valinn. Sjálfvalið er að tenglahnappar séu auðkenndir með þessu tákni



eða heimsækja táknuinu




. Til að breyta útliti tengla og heimsækja hnappa, sjá kafla 10.3.6 *Útlit tengla síðusetts, síða 82*.

9.9.1 Búðu til tengla hnapp í tómu hólfi



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu tengla táknið í tómu hólfi.

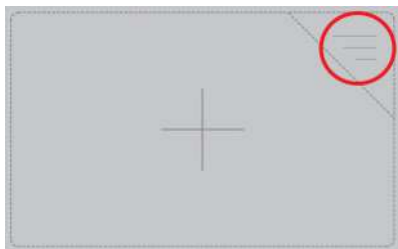

- Til að tengja við glænjja síðu, sjá kafla 9.9.3 *Tengja á nýja síðu / búa til nýja síðu, síða 64*.
- Til að tengja við síðu sem er til, sjá kafla 9.9.4 *Tengja á síðu sem er til, síða 64*.
- Til að tengja við (nýtt) afrit af síðu sem er til, sjá kafla 9.9.5 *Tengja á nýtt afrit af síðu sem er til, síða 64*.
- Til að flytja inn og tengja við síðu, sjá kafla 9.9.6 *Flytja inn og tengja á síðu, síða 64*.

9.9.2 Búa til tengil þar sem hnappur er þegar til



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnappinn sem þú vilt búa til tengil frá.

3. Veldu **Hnappinn** flipann.
4. Veldu **Aðgerð** flokkur.
5. Veldu **Bæta við aðgerð**.
6. Veldu **Tengja**.
 - Til að tengja við glænýja síðu, sjá kafla 9.9.3 *Tengja á nýja síðu / búa til nýja síðu, síða 64*.
 - Til að tengja við síðu sem er til, sjá kafla 9.9.4 *Tengja á síðu sem er til, síða 64*.
 - Til að tengja við (nýtt) afrit af síðu sem er til, sjá kafla 9.9.5 *Tengja á nýtt afrit af síðu sem er til, síða 64*.
 - Til að flytja inn og tengja við síðu, sjá kafla 9.9.6 *Flytja inn og tengja á síðu, síða 64*.

9.9.3 Tengja á nýja síðu / búa til nýja síðu

1. Veldu **Tengja á nýja síðu**. Ný síða svar opnast.
2. Sláðu síðuheiti inn í **Heiti** reitinn. Veldu tákn eða veldu **X** ef þú vilt ekki velja tákn fyrir síðuna.
3. Veldu **Búa til** til að búa til tengil og nýju síðuna. Veldu **Hætta við** til að fara til baka án þess að vista.

9.9.4 Tengja á síðu sem er til

1. Veldu **Tengja á síðu sem er til**. Tengill á síðu sem er til svar opnast.
2. Veldu síðu úr listanum.
Sláðu inn í leitarreitinn til að finna tiltekna síðu eða veldu nýlega opnað til að finna síðu sem þú heimsóttir nýlega.
3. Veldu **Vista** til að búa til tengil. Veldu **Hætta við** til að fara til baka án þess að vista.

Til að læra um heimsækja síðu, sjá kafla 9.9.7 *Heimsækja síðu, síða 65*.

9.9.5 Tengja á nýtt afrit af síðu sem er til

Þessi tengiaðferð gerir þér kleift að nota síðu sem forsníð fyrir nýju síðuna sem þú býrð til.

1. Veldu **Tengja á afrit af síðu**. Tengill á afrit af síðu svar opnast.
2. Veldu síðu úr listanum.
3. Settu inn heiti fyrir nýju síðuna í heiti reitinn.
4. Veldu **Vista** til að búa til afrit af valinni síðu og tengilinn. Veldu **Hætta við** til að fara til baka án þess að vista.



Sláðu inn í leitarreitinn til að finna tiltekna síðu eða veldu nýlega opnað til að finna síðu sem þú heimsóttir nýlega.

Til að læra um heimsækja síðu, sjá 9.9.7 *Heimsækja síðu, síða 65*.

9.9.6 Flytja inn og tengja á síðu

Ef þú ert með síðubúntsskrá sem inniheldur síðu sem þú vilt tengja við getur þú flutt inn síðuna og tengt við hana í einu skrefi með flytja inn og tengja á síðu.

1. Veldu **Flytja inn og tengja á síðu**. Þú getur valið að flytja inn frá myTobiiDynavox eða frá staðbundinni skrá:
 - Frá myTobiiDynavox
 - Veldu **Frá myTobiiDynavox**.
Þú gætir verið beðin/n um að skrá þig inn á TobiiDynavox. Valið síðubúnt frá myTobiiDynavox svar opnast.
 - Veldu síðubúntið sem þú vilt flytja inn og veldu síðan **Næst**.
 - Veldu síðuna sem þú vilt tengja við og veldu síðan **Flytja inn**.
 - Frá staðbundinni skrá
 - Veldu **Frá staðbundinni skrá**. Flytja inn síðubúnt frá staðbundinni skrá svarið opnast.
 - Veldu **Vafra**. Farðu á viðeigandi síðubúnt (.spb) og veldu síðan **Opna**.
 - Veldu **Næst**.
 - Veldu síðuna sem þú vilt tengja við og veldu síðan **Flytja inn**.



Síðuárekstur gerist þegar síðubúntið inniheldur eina eða fleiri síður sem eru þegar til á tækinu en eru ekki eins.



Veldu hvert síðuárekstur tákn veldu síðan hvort þú heldur síðunni sem er til eða skrifa yfir með innfluttu síðunni úr síðubúntinu. Þú þarft að leysa úr öllum síðuárekstrum á þennan hátt áður en þú getur haldið áfram með innflutning síðubúntsins.

9.9.7 Heimsækja síðu

Þegar þær eru virkjaðar setur heimsækja síðu stillingar inn tengil til að senda notanda aftur á fyrri síðu eftir að hann velur val sem virkjar endursendingu á tengdu síðunni. Tenglahnappar sem hafa heimsækja síðu virkjað sýna þetta tákn:



Svona virkar heimsækja síðu

1. Velja heimsækja síðutengil hnapp. Tengda síðan opnast.
2. Veldu á tengdu síðunni.*
Fyrri síðan (sem inniheldur heimsækja síðu tengil hnappinn) opnast.



* Til þess að virkja endursendingu á fyrri síðu þarf valinn hnappur *annað hvort* að innihalda eitt af eftirfarandi aðgerðum:

- Tala eða setja inn skilaboð
- Tala setningu
- Til baka úr heimsókn

Eða, vera einn af eftirfarandi hnappagerðum sem virkjar einnig endursendingu á fyrri síðu:

- Málfræðihnappur
- Beygingahnappur
- Spáhnappur
- Lyklaborð á skjá hnappur forritaður með lyklagerð = bil

Eftirfarandi aðgerðir og hnappagerðir framlengja heimsóknarham og *virka ekki* endursendingu á síðustu síðu:

- Lengja heimsókn
- Fara til baka
- Tengill
- Undirskilið efni
- Gera hlé á aðgangsaðferð
- Spjall

Ef hnappur inniheldur margar aðgerðir (einhverjar sem virkja endursendingu á síðustu síðu og einhverjar sem lengja heimsóknarham) er endursending á síðustu síðu ekki virkjuð nema hnappurinn innihaldi líka Til baka úr heimsókn.

Eftirfarandi aðgerðir hætta við heimsókn:

- Hætta við heimsókn
- Fara heim
- Opna stjórnborð
- Opna lyklaborð

9.9.7.1 Virkja heimsækja síðu á tengill hnappur



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu tengil-hnappinn.
3. Veldu **Aðgerð** flokkur.
4. Veldu **Tengja** aðgerð.
5. Stilltu **Heimsækja síðu** á kveikt.

9.9.7.2 Lengja, hætta við eða endursenda úr heimsókn

Hægt er að nota aðgerðir til að trufla eða framlengja síðuheimsókn sem á sér stað eftir að heimsækja hnappur er valinn. Ef valinn hnappur á heimsækja síðunni inniheldur eina af eftirfarandi aðgerðum mun það breyta venjulegri heimsóknarhegðun á tiltekinn hátt:

- Lengja heimsókn — vera áfram í heimsóknarham, þrátt fyrir aðgerðina(arnar) á þessum hnappi.
- Hætta við heimsókn — fara úr heimsóknarham en vera áfram á núverandi síðu.
- Til baka úr heimsókn — fara úr heimsóknarham strax (áður en eftirfarandi aðgerðir á þessum hnappi eru framkvæmdar) og fara aftur á upphaflega síðu. Allar aðgerðir á hnappnum eru framkvæmdar.

9.10 Stillingar fyrir hnapp aðgangsaðferða

Sérstíddu vissar stillingar aðgangsaðferða á hverjum hnappi.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Aðgangsaðferð** flokkur.
4. Við stillingu hvernar aðgangsaðferðar getur þú valið um að nota notandastillingar eða sérstilla gildið fyrir hnappinn sem þú ert á:
Stillingar augnstýringar
 - Dvalartími — Stilltu þann dvalartíma sem þarf fyrir notendur augnstýringar til að velja þennan tiltekna hnapp.

9.11 Málareglur hnapps

Stillingar tungumálareglna gera þér kleift að tiltaka tungumálið sem verður notað fyrir táknaleit, táknmyndun, orðaspá, beygingu, sjálfvirka bræðingu og talrödd (ef tungumála-sértæk rödd er stillt inn fyrir tungumálið) fyrir hnappinn.

Hnappar erfa sjálfvaldar stillingar tungumálareglna frá stillingum á síðusettsplani eða stillingum síðusetts. Hægt er að stilla tungumálareglur fyrir hnapp handvirkir með því að fylgja eftirfarandi skrefum:



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Kjörstillingar** flokkur.
4. Veldu **Málareglur**.
5. Veldu tungumál úr listanum:
 - **Tungumál sem eru studd að fullu** — hefur áhrif á tungumálaleit, táknmyndun, orðaspá, beygingu, sjálfvirka bræðingu og talrödd (ef tungumála-sértæk rödd hefur verið stillt inn fyrir tungumálið).
Tungumál er aðallega notað með sérnöfnum (til dæmis Harriet Tubman eða Amsterdam). Þegar orð sem eru merkt hlutlaus eru send í skilaboðagluggan verða þau sögð í samræmi við tungumálareglur annarra orða sem eru fyrir í skilaboðaglugganum. Ef skilaboðaglugginn er tómur að öðru leyti, verða hlutlausu orðin sögð í samræmi við stillingar tungumálareglna núverandi eða nýlegustu síðu sem var ekki hlutlaus.
 - **Önnur tungumál** — tungumálin í þessum flokki hafa breytilegt stuðningsstig innan TD Snap® forritsins.

9.12 Viðskeyti og forskeyti

Notaðu hnappa með forskeyti eða viðskeyti strax fyrir eða á eftir öðru orði til að búa til nýtt orð í skilaboðaglugganum.




Viðskeyti og forskeyti virka sem stendur eingöngu á ensku.

Notendastillingarnar „Gera styttingar sjálfvirkir“ verða að vera virkjaðar. Sjá kafla 14.12.2 *Stillingar skilaboðaglugga, síða 106*.

- Búðu til sér hnapp fyrir hvert viðskeyti eða forskeyti.
- Bættu við bandstriki þar sem viðskeytið eða forskeytið tengist hinu orðinu til að búa til nýtt orð án bandstriks. Til dæmis „dapur“ + „leiki“ = „dapurleiki“

- Bættu við tveimur bandstrikum þar sem viðskeytið eða forskeytið tengist hinu orðinu til að búa til nýtt orð með bandstriki. Til dæmis „KR“ + „ingur“ = „KR-ingur“
- Stafsetningarreglum er ekki beitt þannig að rangt stafsett orð og orð sem ekki eru til eru möguleg. Til dæmis, „hamingju“ + „legur“ = „hamingjulegur“ og „hurðar“ + „land“ + „upphaf“ + „sinni“ = „hurðarlandupphafsinni“
- Bæði for- og viðskeytin og önnur orð þarf að slá inn í skilaboðagluggann með venjulegu hnöppunum en ekki lyklaborðshnöppunum.

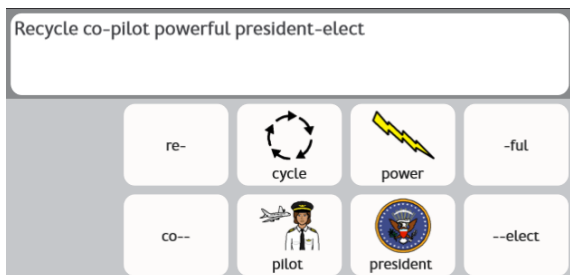

Skýringamynd 35: Dæmi um forskeyta og viðskeyta hnappa

9.13 Breyta stuðningi

Efnisatriði innihalda fyrirfram tilbúinn stuðning til að hjálpa við sjálfsstjórnun og félagsleg samskipti. Þú getur breytt stuðningi til að aðlaga hann að þínum þörfum. Til að læra meira um tegundir stuðnings, sjá kafla 7.4.2 *Stuðningur*, síða 24.

1. Farðu á síðuna sem inniheldur stuðninginn sem þú vilt breyta.



2. Veldu **Breyta** hnappinn.
3. Veldu hnappinn fyrir stuðning sem þú vilt breyta.
4. Veldu **aðgerðina** (Sjónrænn tímaxaki, Fyrst, svo, Handrit eða Félagshæfnisaga).
5. Veldu blýantartáknið í hvaða röð sem er til að gera breytingar.
6. Veldu **Forskoðunarhnappinn** neðst á stuðnings klippiborðinu til að forskoða breytingar þínar á stuðningnum.
7. Þegar því er lokið, velurðu **Búið**.

9.14 Fjarstýringar

Sum Tobii Dynavox tæki, t.d. Indi og I-100, eru búin innrauðum sendi sem hægt er að stjórna í gegnum TD Snap® hugbúnað, sem gerir það að verkum að hægt er að nota þessi tæki sem fjarstýringar fyrir búnað eins og sjónvörp og hljómflokkstæki. Core First síðusettið kemur með forgerðum fjarstýringasíðum á stjórnborðinu. Þessar fjarstýringasíður innihalda hnappa sem eru tilbúnir undir forritun með fjarstýringarskipunum.



TD Snap® fjarstýringar virka ekki með Tobii Dynavox I-12(+) eða I-15(+) tækjum.

9.14.1 Forritun fjarstýringarhnapps



Aðeins þarf að forrita hvern hnapp einu sinni.

Vertu með fjarstýringuna við höndina. Þú þarft hana til að kenna tækinu þínu IR-skipunina.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnappinn á skjánum sem þú vilt forrita til að senda IR-skipunina.
3. Veldu **Hnappinn** flipann.
4. Veldu **Aðgerð** flokkur.
5. Veldu **Bæta við aðgerð**.
6. Veldu **Sendu IR merki**.

7. Veldu **Taka upp**, beindu síðan fjarstýringunni að IR spjaldinu á Tobii Dynavox tækinu og ýttu á hnappinn á fjarstýringunni.
8. Ef þú sérð skilaboðin „upptaka tókst!“ skaltu velja **Búið**.
Ef þú sérð skilaboðin „Ekkert merki fannst. Reyndu aftur.“ farðu aftur í skref 7.

9.14.2 Notkun fjarstýringa



Fjarstýringar eru aðeins tiltækar fyrir samhæfð Tobii Dynavox tæki.

Þú þarft að stilla fjarstýringuna fyrirfram með því að forrita hvern fjarstýringarhnapp með rétttri IR-skipun. Sjá 9.14.1 *Forritun fjarstýringarhnapps, síða 67*.



Skýringamynd 36: Stjórnborð — Fjarstýringarhnappar

1. Farðu á fjarstýringarsíðu sem samsvarar búnaðinum (sjónvarp, hljómfletningstæki o.s.frv.) sem þú vilt stjórna.
2. Beindu IR-glugganum á Tobii Dynavox tækinu í átt að búnaðinum sem þú vilt stjórna.
3. Veldu hnappinn fyrir viðeigandi skipun.

9.15 Breyta síðu

Breytingar gerðar á síðuflipa munu aðeins hafa áhrif á *núverandi síðu*. Hægt er að nota stillingar á síðuflipanum til að hunsa sumar síðustillingar. Til dæmis ef þú vilt að skilaboðasláin sé sjáanleg á flestum síðum en ekki á stjórnborðssíðunni, myndir þú gera eftirfarandi: 1. Virkja skilaboðaslá í síðusettsstillingum. 2. Fara á stjórnborðssíðu. 3. Velja síðuflipann. 4. Velja kjörstillingar 5. Í sýnileiki skilaboðaslár á síðu, skaltu óvirkja jafna stillingar síðusetts: kveikt. 6. Stilltu sýnileika skilaboðaslár á slökkt.


9.15.1 Nafn síðu



Skýringamynd 37: Nafn síðu



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflipann**.
3. Sláðu inn **Merki** reitinn til að breyta heiti síðu.

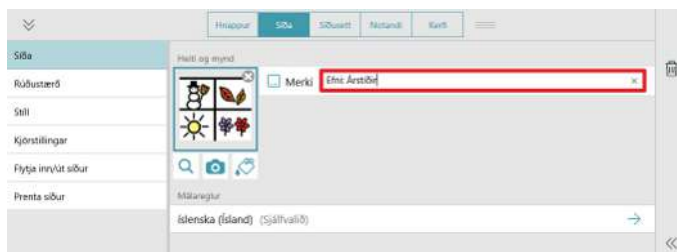

9.15.2 Tákn síðu



Skýringamynd 38: Tákn síðu



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflippann**.
3. Bæta við eða breyta síðutákni:


Til að leita að tákn í táknasettunum þínum:

- Veldu  **Táknaleit** hnappinn.
- Táknaleitarsvar opnast.
- Sláðu inn í textareitinn til að finnstilla leitarskilmála.




Valkvætt: Til að skapa síur fyrir leitarniðurstöður, veldu hnappinn eiginleikana sem þú vilt sjá í táknleitarniðurstöðum þínum (fullorðinn, barn, kona, karl).

- Veldu viðeigandi tákn.
- Veldu **Búið**.

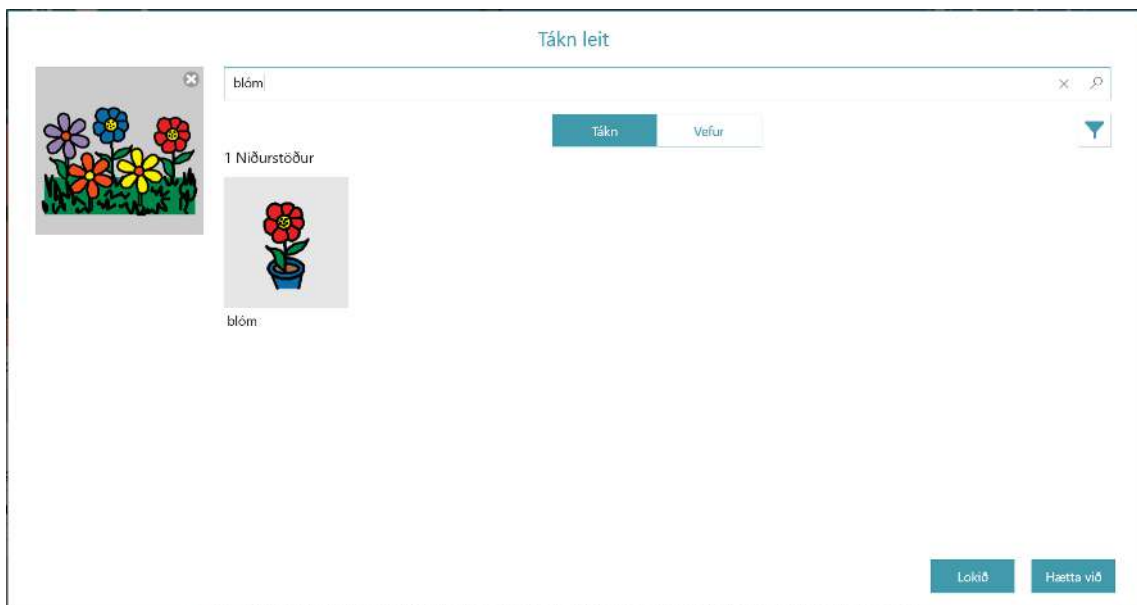

Til að leita að mynd á vefnum (nettenging nauðsynleg):

- Veldu  **Táknleit** hnappinn.
- Táknleitar svar opnast.
- Veldu **Vefflipann** og sláðu síðan inn leitarorð í textareitinn.
- Veldu viðeigandi mynd.
- Veldu **Búið**.

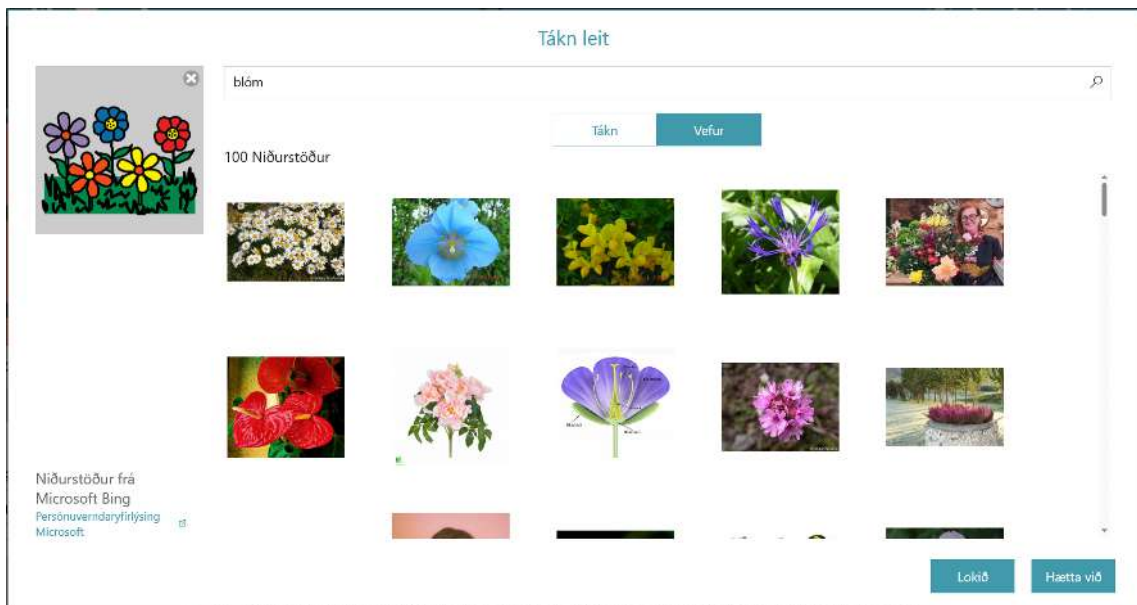

Til að nota myndavél til að taka mynd fyrir síðumynd.

- Veldu  **Myndavél** hnappinn.
- Veldu **Frá myndavél**.
- Notaðu myndavélina á tækinu til að taka mynd.

Til að nota mynd sem geymd er á tækinu:



- Veldu **Myndavél** hnappinn.
- Veldu **Frá myndagagnasafni**.
- Notaðu skráavafrann til að fara að ákjósanlegri myndaskrá.



Ef þú vilt ekki nota síðutákn skaltu velja **X** á síðutákn.

9.15.3 Stillingar málareglna

Stillingar málareglna síðu stilla sjálfvirkar málareglur fyrir hnappa á síðunni. Stillingar tungumálareglna stjórna tungumálinu sem verður notað fyrir táknaleit, táknmyndun, orðaspá, beygingu, sjálfvirka bræðingu og talrödd (ef tungumála-sértæk rödd er stillt inn fyrir tungumálið).

Hnappar erfa sjálfvaldar stillingar tungumálareglna frá stillingum á síðusettsplani eða stillingum síðusetts. Þegar þú stillir inn málareglur síðu taka allir hnappar sem eru á síðunni þá stillingu og nýir hnappar sem gerðir eru á síðunni verða líka sjálfkrafa með þá stillingu. Til að breyta málareglum fyrir tiltekna hnappa, sjá kafla 9.11 *Málareglur hnapps*, síða 66..



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflipann**.
3. Veldu **Málareglur**.
4. Veldu tungumál úr listanum:

- **Tungumál sem eru studd að fullu** — hefur áhrif á tungumálaleit, táknmyndun, orðaspá, beygingu, sjálfvirka bræðingu og talrödd (ef tungumála-sértæk rödd hefur verið stillt inn fyrir tungumálið).

Tungumál tungumál er aðallega notað með sérnöfnum (til dæmis Albert Einstein eða Coca-Cola). Þegar orð sem eru merkt hlutlaus eru send í skilaboðagluggan verða þau sögð í samræmi við tungumálareglur annarra orða sem eru fyrir í skilaboðaglugganum. Ef skilaboðaglugginn er tómur að öðru leyti, verða hlutlausu orðin sögð í samræmi við stillingar tungumálareglna síðusettsins.

- **Önnur tungumál** — tungumálin í þessum flokki hafa breytilegt stuðningsstig innan TD Snap® forritsins.

9.15.4 Rúðustærð síðu



Sjálfvalin stilling er stillt inn á síðusettsflipanum. Ef þú vilt hunsa sjálfvaldar stillingar síðusettsins í þessu tilviki, skaltu stilla jafna síðusettt á **Slökkt**. Til að samstillja þessar stillingar með afganginum af síðusettnu, stillirðu jafna síðusettt á **Kveikt**.

9.15.4.1 Breyta rúðustærð síðu



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflipann**.
3. Veldu **Rúðustærð** flokkur.
4. Stilltu **Stillingar jafna saman síðusettti** á **Slökkt**.
5. Veldu **rúðustærð**.
6. Veldu fyrirfram tilbúna rúðustærðir eða stilltu fjölda raða og dálka til að búa til sérsniðna rúðustærð.



Ef þú ert ekki að búa til algjörlega sérsniðna síðu er þér eindregið ráðlagt að nota fyrirfram tilbúna rúðustærðir síðusettsins. Fyrirfram tilbúna rúðustærðir munu sýna forútfyllt síðuefnið eins og það er hannað af sérfræðiteymi okkar, en aðrar rúðustærðir gera það ef til vill ekki.



Ef þú vilt sýna skilaboðaslánna og/eða verkfærastiku verður þú að velja rúðustærð 3x3 eða stærri.

Til að breyta stærð bila á milli hnappa, sjá kafla 10.3.7 *Rúðujaðar síðusetts*, síða 83.

Tafla 11: Dæmi um rúðustærðir (ekki ítarlegt)



2x3



3x4



6x6

9.15.5 Bakgrunnslitur síðu

 Sjálfvalin stilling er stillt inn á síðusettsflípanum. Ef þú vilt hunsá sjálfvaldar stillingar síðusettsins í þessu tilviki, skaltu stilla jafna síðusettt á **Slökkt**. Til að samstillja þessar stillingar með afganginum af síðusettnu, stillirðu jafna síðusettt á **Kveikt**.

1. Farðu á síðuna sem þú vilt hafa annan bakgrunnslit á.



2. Veldu **Breyta** hnappinn.
3. Velja **síðuflípann**.
4. Veldu **Stíll** kafla.
5. Stilltu bakgrunnslitur síðu jafna saman við síðusettt **Slökkt**.
6. Veldu **Lit**. Listi yfir bakgrunnsliti síðu mun opnast.
7. Veldu **Lit**.



Þú getur búið til þína eigin sérsniðnu lit! Sjá kafla 9.19 *Sérsniðnir litir*, síða 76.

9.15.6 Sýna/fela skilaboðaslá.

 Sjálfvalin stilling er stillt inn á síðusettsflípanum. Ef þú vilt hunsá sjálfvaldar stillingar síðusettsins í þessu tilviki, skaltu stilla jafna síðusettt á **Slökkt**. Til að samstillja þessar stillingar með afganginum af síðusettnu, stillirðu jafna síðusettt á **Kveikt**.

9.15.6.1 Breyta sýnileika skilaboðaslár



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflípann**.
3. Veldu **Kjörstillingar** flokkur.
4. Stilltu **Stillingar jafna saman síðusettti** á **Kveikt** til að jafna við tiltekna stillingu eða **Slökkt** til að gera sýnileika skilaboðaslár ódruvísi á þessar síðu en á hinum síðunum í síðusettnu.

9.15.7 Eyða síðu



Eyðing er varanleg aðgerð. Aðeins eyða síðu ef þú ert viss um að þú munir ekki vilja nota hana aftur í framtíðinni.

1. Farðu á síðuna sem þú vilt eyða.



2. Veldu **Breyta** hnappinn.
3. Velja **síðuflípann**.
4. Veldu  **Eyða**. Eyða síðu svar opnast.

5. Veldu **Eyða** hnappinn til að eyða síðunni varanlega eða veldu **Hætta við** til að fara aftur í síðustillingar án þess að eyða síðunni.

9.15.8 Flytja inn/út síður

Sjá kafla 13.3 *Síðubúnt*, síða 96.

9.16 Skannaðir hópar

Skannaður hópur er svæði sem inniheldur hnappa sem skanna sem stök eining. Þegar skannaður hópur er valinn eru hnapparnir innan þess svæðis skannaðir. Með því að nota skannaða hópa er mun fljótlegra að nota skönnunaraðgangsaðferðina.

Til að nota skannaða hópa verður Skönnunaraðgangsaðferðin að vera virk með Hópskönnunarstillinguna virka. Fyrir frekari upplýsingar sjá kafla 14.13.8 *Skönnunar valmöguleikar*, síða 114.

Búa til og breyta skönnuðum hópum




1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflipann**.



3. Veldu **Skannaðir hópar** verkfærið.
Fyrsti skannaði hópurinn er búinn til fyrir þig sjálfvikt.



4. Til að bæta svæðum við skannaða hópinn þinn skaltu velja og draga yfir) svæði á síðu til að bæta þeim við skannaða hópinn. Svæðin geta verið hvar sem er á síðunni, þau þurfa ekki að snertast.

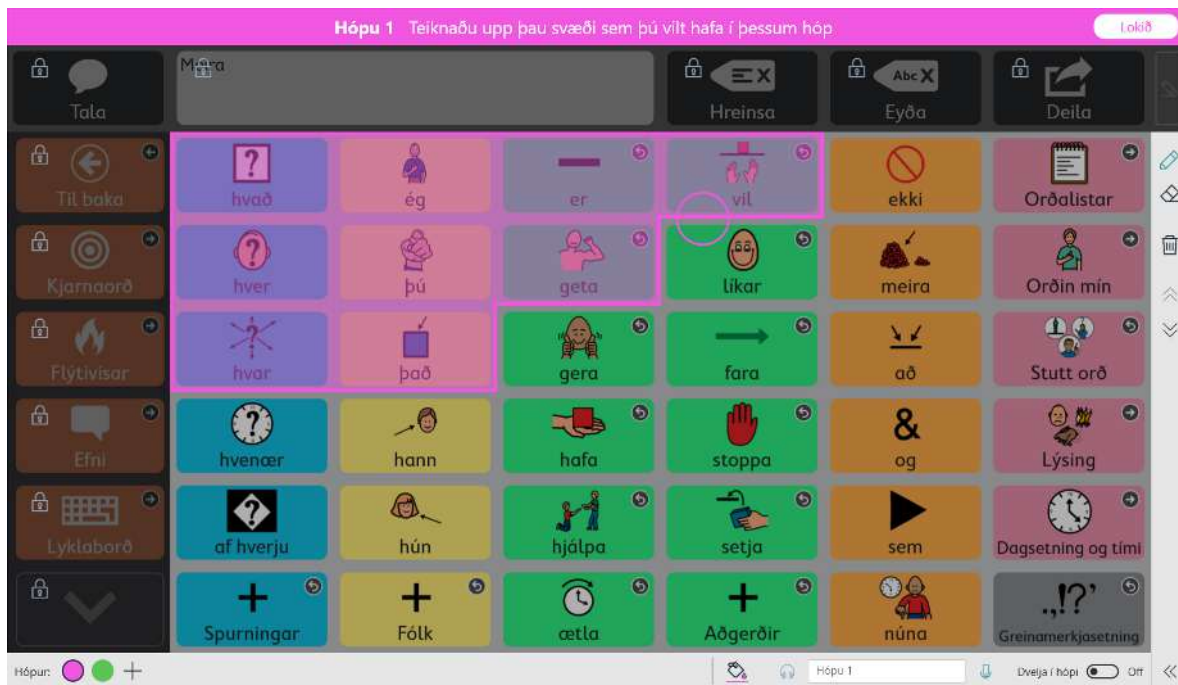

5. Til að fjarlægja svæði úr skönnuðum hópi skal velja sem þú vilt fjarlægja úr hópnum.



Eyða verkfærið og smella síðan á hvert það svæði

Þú getur ekki bætt skilaboðaslá eða tækjastiku við skannaðan hóp. Það er vegna þess að skilaboðaslá og tækjastika eru alltaf þeirra eigin skannaði hópur.

Skannaðir hópar eru skilgreindir sem svæði á síðu, ekki ákveðnir hnappar. Ef þú flytur hnapp gæti hann verið í öðrum skönnuðum hópi í nýju stöðunni.


Skönnunarröðin fylgir vinstri til hægri, upp og niður framgangi. Númer skönnuðu hópanna tengjast ekki skönnunarröðinni.

Hnappar á síðunni sem ekki eru í skönnuðum hópi verða skannaðir hver fyrir sig.

Skannaðir hópar fara eftir rúðustærð.



6. Til að búa til nýjan skannaðan hóp skal velja  hnapp í neðra vinstra horninu.
7. Til að fara á milli skannaðra hópa skal velja litaða hringinn sem passar við lit skannaða hópsins sem þú vilt breyta.

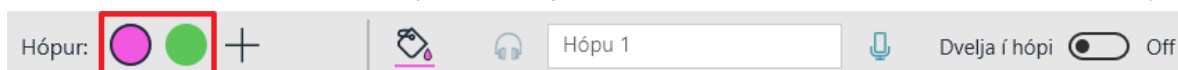

8. Til að eyða skönnuðum hópi skal fyrst velja skannaða hópinn eins og lýst er í ofangreindu skrefi og velja síðan



Eyða skönnuðum hópi.



Notaðu **Fletta upp** og **Fletta niður** örvar til að fletta á síðunni.



9.16.1 Valkostir skannaðs hóps

Litur skannaðs hóps



- Veldu  litaverkfærið til að velja lit fyrir núverandi skannaðan hóp. Litir skannaða hópsins birtist eingöngu í breytingarham en ekki í notkunarham.

Hljóðmerki skannaðs hóps

- Texti sem sleginn er inn í hljóðmerkisreitinn verður lesinn þegar hópurinn er skannaður (ef Lesa hljóðmerki er virkt).



- Ef þú vilt taka upp sérsniðna hljóðmerkisupptöku, sjá kafla 9.6.3.2 *Taka upp, síða 41*.

Dvelja í hópi

- Þegar hann er virkjaður mun skanninn endurræsast innan skannaða hópsins eftir að valið hefur verið. Þetta gerir notendum kleift að framkvæma fjölval innan eins hóps. Þegar Dvelja í hópi er gert óvirkt endurræsist skönnunarröðin efst á síðu eftir að valið hefur verið.

9.17 Breyta skilaboðaslá

Breytingar á skilaboðaslánni eiga við allt síðusettið.

9.17.1 Færðu til og breyttu stærð hluta í skilaboðaslá



1. Veldu  **Breyta** hnappinn.


2. Veldu hlutinn á skilaboðaslánni sem þú vilt breyta um stærð (hnapp eða skilaboðaglugga).
3. Til að breyta stærð hlutarins, veldu og haltu niðri á einum af bláu punktum í horninu á hlutnum og dragðu síðan að viðkomandi stærð.
Til að færa hlutinn, veldu og haltu inni í miðju hlutarins og dragðu síðan til vinstri eða hægri í skilaboðaslánni.

 Skilaboðagluggann er einungis hægt að stækka inn í tóm hólfi.

9.17.2 Bæta við hnöppum í skilaboðaslánna



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu tóman reit í skilaboðaslánni.
Ef það eru engir tómir reitir í skilaboðaslánni þá hefurðu þrjá möguleika:
 - Að minnka skilaboðagluggann. Sjá kafla 9.17.1 *Færðu til og breyttu stærð hluta í skilaboðaslá, síða 74.*
 - Eyða einum eða fleiri hnöppum í skilaboðaslánni. Sjá kafla 9.17.3 *Fjarlægja hnappa úr skilaboðaslá, síða 75.*
 - Stækka rúðustærð. Sjá kafla 10.2 *Rúðustærð, síða 79.*
3. Veldu hnapp úr valmyndinni og bættu honum við skilaboðaslánna. Til að læra meira um skilaboðasláhnappana, sjá kafla 6 *Skilaboðaslá, síða 19.*

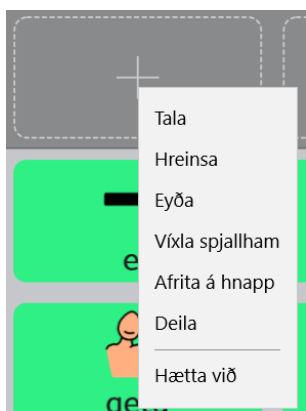

Skýringamynd 39: Skilaboðaslá hnappavalmynd

9.17.3 Fjarlægja hnappa úr skilaboðaslá



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp í skilaboðaslá.
3. Veldu  **Eyða.**

 Ekki er hægt að eyða skilaboðaglugganum.

9.18 Breyta verkfærastiku



Skýringamynd 40: Core First verkfærastikan, séð í breytingaham, með hnappa, falda hnappa og tomt hólfi.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hvaða hnapp sem er á verkfærastikunni til að breyta honum.
Þú gætir þurft að skrúna til að sjá allt efni verkfærastikunnar eða til að fá aðgang að tómun hólfi á verkfærastikunni.
3. Smelltu og haltu niðri, dragðu síðan hnappana til að endurraða hnöppunum innan verkfærastikunnar.



Þú getur ekki dregið hnappa á milli síðunnar og verkfærastikunnar.

9.19 Sérsniðnir litir

Þú getur búið til, breytt og vistað sérsniðna liti úr hvaða litavalmynd sem er í TD Snap®.

1. Í breytingarham, veldu hlutinn sem þú vilt breyta litnum á.
2. Veldu **Stíll**.
3. Veldu frumlitinn sem þú vilt breyta (rammi, bakgrunnur, texti o.s.frv.)



4. Veldu **breyta lit** hnappinn.
5. Veldu **Vista** til að vista nýju litabreytinguna þína. Veldu **Hætta við** til að fara til baka án þess að vista.
6. Vistaðir sérsniðnir litir eru fáanlegir efst í litavalmyndinni í hvert skipti sem þú opnar litavalmyndina.

Til að eyða sérsniðnum lit, veldu litinn og veldu síðan  **Eyða**.



Til að beita litabreytingum á hluti í gegnum síðusettið, veldu **Síðuset** flipann.

10 Stillingar síðusetts

10.1 Síðusett

10.1.1 Veldu síðusett



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu röð undir **Síðusett notandanafns**.
4. Veldu síðusett úr listanum.

10.1.2 Búa til nýtt síðusett

Búa til síðusett úr foruppsettum, afritum af síðusetti notanda sem er til, eða staðbundinni skrá



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu röð undir **Síðusett notandanafns**.
4. Veldu **Búa til síðusett**.
Veldu síðusett svar opnast.
5. Veldu síðusett:
Foruppsettur síðusettaflipi
– Þetta eru tilbúin síðusett sem búið er að setja upp í TD Snap® á tækinu þínu.
Síðusett notanda
– Veldu eitt af síðusettum þínum sem er til nú þegar til að nota sem forsníð (búa til afrit).
Staðbundnar skrár
– Flytja inn síðusettsskrá (.sps) sem er geymt á staðbundnu tæki eða tengdu drifi.
6. Veldu **Næst** til að búa til nýtt síðusett.
7. Settu inn heiti fyrir nýja síðusettið.
8. Veldu **Búa til** til að búa til síðusett. Veldu **Hætta við** til að fara aftur í stillingar síðusetts án þess að búa til nýtt síðusett.

Ná í síðusett frá myTobiiDynavox



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu núverandi síðusett.
4. Veldu **Hlaða niður síðusetti**.
Þú gætir verið beðin/n um að skrá þig inn á TobiiDynavox.
5. Veldu síðusett úr listanum, veldu síðan **Niðurhal**.
6. Þegar niðurhali er lokið skaltu setja inn heiti fyrir síðusettið, veldu síðan **Save**.

10.1.3 Endurnefna síðusett og breyta lýsingu



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.



3. Í lista yfir síðusettt notanda velurðu **Breyta** hnappinn við hliðina á heiti síðusettsins sem þú vilt endurnefna. Breyta síðusettsupplýsingum svar opnast.
4. Breyttu textanum í **Heiti** reitnum og/eða **Lýsing** reitinn.
5. Veldu **Vista** til að vista breytingar. Veldu **Hætta við** til að fara aftur í lista yfir síðusettt án þess að vista.

10.1.4 Eyða síðusettti



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusettt** flipann.
3. Í lista yfir síðusettt notanda velurðu  **Eyða** hnappinn við hliðina á heiti síðusettsins sem þú vilt eyða.
4. Veldu rauða **Eyða** hnappinn.
5. Veldu **Eyða** til að fjarlægja síðusetttið varanlega. Veldu **Hætta við** til að fara aftur í lista yfir síðusettt án þess að eyða.



Þú getur ekki eytt síðusettti sem er verið að nota.

10.1.5 Stilla heimasíðu



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusettt** flipann.
3. Veldu **Heimasíða**.
4. Veldu síðu úr listanum.



Sláðu inn í leitarreitinn til að finna tiltekna síðu eða veldu nýlega opnað til að finna síðu sem þú heimsóttir nýlega. Ráðlögð heimasíða fyrir rúðustærð 1x1 upp í 2x3 er studd leiðsögn. Fyrir rúðustærðir 3x3 og stærri er stungið upp á kjarnaorðum sem heimasíðu.

10.1.6 Stilla inn lyklaborðssíðu



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusettt** flipann.
3. Veldu **Síða lyklaborðs**.
4. Veldu síðu úr listanum.



Sláðu inn í leitarreitinn til að finna tiltekna síðu eða veldu nýlega opnað til að finna síðu sem þú heimsóttir nýlega. Notaðu leitarhugtakið „lyklaborð“ til að þrengja leitarniðurstöður við lyklaborðssíður.

10.2 Rúðustærð



Sum síðusettt, eins og Motor Plan og P.O.D.D., tengja sérstakar rúðustærðir við sérstakar útgáfur af síðusettnu. Til að nota aðra rúðustærð með þessum síðusettnum verður þú að velja aðra útgáfu af síðusettnu.

Valin rúðustærð í stillingum síðusetts er sjálfvalin rúðustærð fyrir notandann. Allar síður verða með sjálfvaldar rúðustærðir í stillingum síðusetts nema annað sé tiltekið í stillingum síðu.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.

2. Velja **Síðusettt** flippann.
3. Veldu **Rúðustærð** flokkur.
4. Veldu rúðustærð úr lista yfir fyrirfram tilbúna rúðustærðir eða veldu fjölda raða og dálka til að búa til sérsniðna rúðustærð.



Ef þú ert ekki að búa til algjörlega sérsniðna síðu er þér eindregið ráðlagt að nota fyrirfram tilbúna rúðustærðir síðusettisins. Fyrirfram tilbúna rúðustærðir munu sýna forútfyllt síðuefnið eins og það er hannað af sérfræðiteymi okkar, en aðrar rúðustærðir gera það ef til vill ekki.



Ef þú vilt sýna skilaboðaslánna og/eða verkfærastiku verður þú að velja rúðustærð 3x3 eða stærri.

Til að breyta stærð bila á milli hnappa, sjá kafla 10.3.7 *Rúðujaðar síðusetts*, síða 83.

Tafla 12: Dæmi um rúðustærðir (ekki ítarlegt)



2x3



3x4



6x6

10.3 Stíll síðusetts

Stillingar sem gerðar eru í stíl síðusetts skilgreina útlit síðusettisins. Allar síður í síðusettinu, þ.m.t. nýjar síður, munu nota þessar stílstillingar nema þær séu hunsaðar handvirkt á síðu- eða hnappastigi.

10.3.1 Húðlitur og hárlitur tákns

Stilltu húðliti og hárliti sem notuð eru í táknum sem lýsa fólki. Fjölbreytnistillingin býður upp á úrval húðlita og hárlita og er sjálfval. Ef sérstakur húðlitur eða hárlitur er valinn er það val notað fyrir öll tákni.




Stillingar á húðlit og hárlit tákns **taka ekki til** eftirfarandi:

- Tákn sem lýsa einstaklingum (þekktum einstaklingum, sögulegum persónum, o.s.frv.)
- Tákn sem eru sýnd sem hluti af Boardmaker athöfnum í gangi í TD Snap
- Snap málstolsmyndasettinu
- Tákn sem hefur verið breytt í táknarittlinum

Ef METACOM táknin eru notuð í núverandi síðusetti er hárlitsstillingin ekki í boði.




1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusettt** flippann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Húðlitur** eða **Hárlitur** undir Stíll.
5. Veldu einn af eftirfarandi valkostum:
 - **Ekki stillt** — Sýna táknin eins og þau voru upprunalega hönnuð af táknhönnuðunum.
 - **Fjölbreytt** — Notað úrval lita í táknum.
 - **Nýtt** — Hann sérsniðna liti til að nota á öll tákni.
 - **Litur** — Veldu lit úr litahlutanum til að nota á öll tákni.

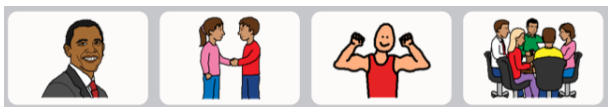

Skýringamynd 41: Húðlitur og hárlitur ekki stilltur



Skýringamynd 42: Húðlitur og hárlitur stilltur á Fjölbreytt

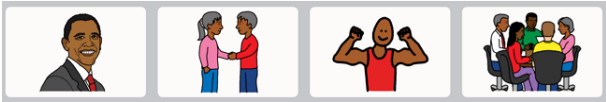

Skýringamynd 43: Húðlitur og hárlitur stilltur á ákveða liti



Þú getur breytt einstökum táknum með táknaflinum. Sjá kafla 9.6.6 *Breyta tákni, síða 44*.

10.3.2 Leturgerð merki hnappa síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Leturgerð** undir stíll.
5. Veldu leturgerð.

10.3.3 Stærð leturgerðar merki hnappa síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Leturgerð** undir stíll.
5. Veldu stærð leturgerðar.

10.3.4 Feitletruð merki hnappa síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Feitletrað** undir stíll.
5. Kveiktu eða slökktu á feitletrun.

10.3.5 Uppsetning hnappa síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Uppsetning hnappa** undir stíll.
5. Veldu uppsetningu úr listanum.




Merki efst, mynd neðst




Merki neðst, mynd efst




Merki vinstri, mynd hægri

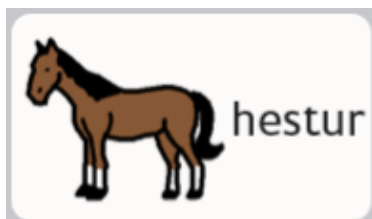

Merki hægri, mynd vinstri

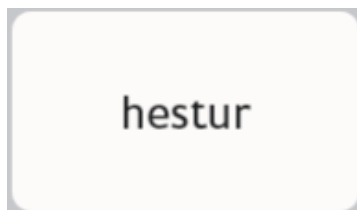

Aðeins merki

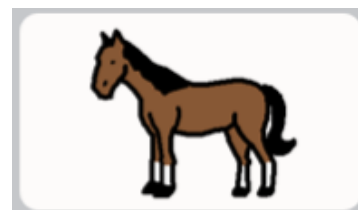

Aðeins mynd

10.3.6 Útlit tengla síðusetts

Stilltu inn útlit hnappa sem fara á aðrar síður.

Tafla 13: Stílar sjónræns hlekks

Engin	Ekki sýna sjónrænan hlekk.	
Yfirlitstákn	Lítið tákn birtist í horni hnappsins sem sýnir hvað hann gerir (tengill á aðra síðu, heimsækja síðu, eða fara til baka)	
Mappa fyrir hlekk	Tenglahnappur er í laginu eins og mappa. Stíll á aðeins við um tenglahnappa, ekki fara til baka eða heimsækja hnappa.	

Hornflipi fyrir hlekk	Hlekkhnappur hefur gráan þríhyrning í einu horninu. Stíll á aðeins við um tenglahnappa, ekki fara til baka eða heimsækja hnappa.	
------------------------------	--	--

10.3.7 Rúðujaðar síðusetts

Stilltu inn stærð bilanna á milli hnappa.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusettt** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Rúðujaðarstuðull** undir rúðujaðri.
5. Veldu stærð rúðujaðarstuðuls.

10.3.8 Sjálfvaldir bakgrunnslitir síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusettt** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu hverja sem er af eftirfarandi röðum til að breyta tilteknum bakgrunnslit:
 - **Bakgrunnur síðu** — Sjálfvalinn litur fyrir bakgrunn síðunnar.
 - **Bakgrunnur tækjastiku** — Sjálfvalinn litur fyrir bakgrunn síðunnar.
 - **Bakgrunnur skilaboðaslár** — Sjálfvalinn litur fyrir bakgrunn skilaboðaslárinnar (ekki skilaboðagluggann).



Þú getur búið til þína eigin sérsniðnu liti! Sjá kafla 9.19 *Sérsniðnir litir*, síða 76.

10.3.9 Leturgerð skilaboðaglugga síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusettt** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Leturgerð** undir skilaboðaglugga.
5. Veldu leturgerð.

10.3.10 Stærð leturgerðar skilaboðaglugga síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusettt** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Stærð leturgerðar** undir skilaboðaglugga.
5. Veldu stærð leturgerðar.

10.3.11 Litur texta skilaboðaglugga síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðuset** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Litur texta** undir skilaboðaglugga.
5. Veldu lit texta



Þú getur búið til þína eigin sérsniðnu liti! Sjá kafla 9.19 *Sérsniðnir litir*, síða 76.

10.3.12 Bakgrunnslitur texta skilaboðaglugga síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðuset** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Bakgrunnur** undir skilaboðaglugga.
5. Veldu lit.



Þú getur búið til þína eigin sérsniðnu liti! Sjá kafla 9.19 *Sérsniðnir litir*, síða 76.

10.3.13 Auðkennislitur texta skilaboðaglugga síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðuset** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Auðkennislitur texta** undir skilaboðaglugga.
5. Veldu lit.



Þú getur búið til þína eigin sérsniðnu liti! Sjá kafla 9.19 *Sérsniðnir litir*, síða 76.

10.3.14 Bakgrunnslitur texta skilaboðaslár síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðuset** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Bakgrunnur skilaboðaslár** undir skilaboðaglugga.
5. Veldu lit.



Þú getur búið til þína eigin sérsniðnu liti! Sjá kafla 9.19 *Sérsniðnir litir*, síða 76.

10.3.15 Stíll flettihnapps



1. Veldu **Breyta** hnappinn.

2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Stíll flettihnapps** undir flettihnappar.
5. Þegar sjálfgefin stilling er virk eru litirnir sjálfkrafa stilltir fyrir birtuskil og sýnileika í tengslum við bakgrunnslit síðunnar. Þegar sjálfgefin stilling er óvirk, stillirðu yfirlitshnappinn bakgrunnslit, rammalit, örvalit og þykkt ramma til að nota í gegnum allt síðusettið.



Þú getur búið til þína eigin sérsniðnu liti! Sjá kafla 9.19 *Sérsniðnir litir*, síða 76.

10.4 Kjörstillingar síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.

2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu **Kjörstillingar**.
4. Veldu hvað sem er af eftirfarandi til að breyta tilteknum stillingum:

Viðmót

- **Kveikt á skilaboðaslá:** Þegar virkjað er sjálfvalið að skilaboðasláin er sýnd á hverri síðu.
- **Staðsetning verkfærastiku:** Veldu að sýna verkfærastiku vinstra eða hægra megin á hverri síðu eða slökktu á henni í verkfærastikunni.

Verkfærastikuraðir

- **Samsvörun síðusetts:** Þegar þetta er gert virkt verður fjöldi raða sem tiltækar eru á tækjastikunni sá sami og fjöldi raða í valda síðusettinu. Til að breyta fjölda raða í tækjastikunni óháð rúðustærð síðusettsins skal gera þessa stillingu óvirka og stilla fjölda raða sem óskað er eftir.

Skilaboðagluggi

- **Sjálfvirkar beygingar málfræðihnappa:** Þegar þeir eru virkir munu málfræðihnappar uppfærast eftir þörfum til að passa við málfræðisamhengi efnisins í skilaboðaglugganum.
- **Mynda samsetningu sjálfkrafa:** Þegar þau eru virk, sameinast samfelld orð til að mynda algenga samsetningu eða samsett orð.

Síðusett skannaðra hópa


- **1. xxx, 2. yyy, 3. zzz:** Stilltu fyrirmælin á því hvernig skanna á síðusettsskönnunarhópana; Síðu, tækjastiku og skilaboðaslá. Stilltu stillingar fyrir skönnunarfyrirmæli, hljóðmerki og dvöl í hópi fyrir síðusettsskönnunarhópana; Síðu, tækjastiku og skilaboðaslá.

10.5 Aðlögunarhnappar



Þessi hluti á aðeins við um Tobii Dynavox I-13 og I-16 tæki.

Aðlögunarhnappar sem er að finna framan á Tobii Dynavox I-13 og I-16 tækjunum má velja með snertingu eða

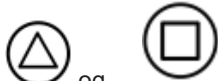

augnstýringu. Tvo þessara hnappa og hnappana má forrita með TD Snap® aðgerðum sem eru framkvæmdar ef þeir eru valdir með augnstýringu á meðan TD Snap® er notað.

Stilla inn augnstýringar aðgerðir aðlögunarhnappa



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Velja **Aðlögunarhnappar**.



4. Veldu eða úr listanum.
5. Veldu **Bæta við aðgerð**.

6. Veldu aðgerð.



Til að bæta við fleiri aðgerðum endurtekurðu skref 5 og 6.

Stilla inn snertiaðgerðir aðlögunarhnappa



Hegðun aðlögunarhnappa er stillt inn í Tobii Dynavox vélbúnaðarstillinga forritinu. Þú getur ræst þetta forrit beint með flýtleið sem má finna á skjáborðinu eða í gegnum TD Snap® eins og lýst er að neðan.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Velja **Aðlögunarhnappar**.
4. Veldu **Sjá aðgerðir fyrir snertingu**. Tobii Dynavox vélbúnaðarstillingaforritið ræsist.
5. Notaðu fellivalmyndirnar í vélbúnaðarstillingaforritinu til að velja aðgerðirnar fyrir aðlögunarhnappana þegar þeir eru valdir með snertingu.



Hegðun aðlögunarhnappa er stillt inn í Tobii Dynavox vélbúnaðarstillinga forritinu. Þú getur ræst þetta forrit beint með flýtleið sem má finna á skjáborðinu eða í gegnum TD Snap® eins og lýst er að neðan.

10.6 Um síðusett

Þessi kafli sýnir númer útgáfu síðusettsins og stillingar efnishönnuðar.

10.6.1 Stillingar efnishönnuða síðusetts

Sérstakar stillingar fyrir háþróaðri síðusettsskapara.

10.6.1.1 Stilla inn hámarkaða rúðustærð

Stilltu inn hvaða rúðustærðir birtast í lista yfir hámarkaðar rúðustærðir fyrir þetta síðusett.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu **Um**.
4. Veldu **Efnishönnuða stillingar**.
5. Veldu **Rúðustærðir**.
6. Til að bæta rúðustærð við listann skaltu skrúna til hægri og velja **Bæta við nýrri stærð**. Bæta við hámarkaðri rúðustærð svarið birtist.
7. Veldu fjölda **Raðir** og **Dálkar** fyrir nýja hámrörkuðu rúðustærðina (allt að 15 x 15), veldu síðan **Vista**.
8. Til að fjarlægja hámarkaða rúðustærð veldu **Eyða** táknið á rúðustærðinni í listanum. Eyða rúðustærð viðvörðun birtist. Ef þú ert viss um að þú viljir eyða rúðustærð, velurðu **Eyða**. Annars velurðu **Hætta við** til að loka viðvörðuninni án þess að eyða.

10.6.1.2 Málareglur síðusetts

Stillingar málareglna síðusetts stilla sjálfvirkar málareglur fyrir hnappa og síður í síðusettinu. Stillingar tungumálareglna stjórna tungumálinu sem verður notað fyrir táknaleit, táknmyndun, orðaspá, beygingu, sjálfvirka bræðingu og talrödd (ef tungumála-sértæk rödd er stillt inn fyrir tungumálið).

Hnappar erfa sjálfvaldar stillingar tungumálareglna frá stillingum á síðusettssplani eða stillingum síðusetts. Þegar þú stillir inn málareglur síðusetts taka allir hnappar sem eru í síðusettinu þá stillingu og nýir hnappar sem gerðir eru í síðusettinu verða líka sjálfkrafa með þá stillingu. Til að breyta málareglum fyrir tiltekna síður í síðusettinu, sjá kafla 9.15.3 *Stillingar málareglna, síða 71*. Til að breyta málareglum fyrir tiltekna hnappa, sjá kafla 9.11 *Málareglur hnapps, síða 66*.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðuset** flipann.
3. Veldu **Um**.
4. Veldu **Efnishönnuða stillingar**.
5. Veldu **Málareglur**.
6. Veldu tungumál úr listanum:
 - **Tungumál sem eru studd að fullu** — hefur áhrif á tungumálaleit, táknmyndun, orðaspá, beygingu, sjálfvirka bræðingu og talrödd (ef tungumála-sértæk rödd hefur verið stillt inn fyrir tungumálið).
 - **Önnur tungumál** — tungumálin í þessum flokki hafa breytilegt stuðningsstig innan TD Snap® forritsins.

11 Prenta

Prentaðu eina eða fleiri síður á pappír eða á PDF.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflipanum**.



3. Veldu **Prenta** í tækjastikunni hægra megin á skjánum. Veldu síður til að prenta svar opnast. Þú getur einnig prentað frá **Prenta síður** svæðinu í síðuflipanum.
4. Núverandi síðu er bætt við prentunarröðina sjálfkrafa. Veldu fleiri síður úr listanum til að bæta þeim við prentunarröðina.
 - Sláðu inn í leitarreitinn til að leita að heiti síðu.
 - Til að bæta öllum síðunum úr núverandi leitarniðurstöðum í prentunarröðina, veldu **Velja allt**.
 - Ef þú velur **Velja allt** og afhakar síðan **Velja allt** mun prentunarröðin endurstillast.
 - Til að fjarlægja síður úr prentunarröðinni veldu **X** við hliðina á heiti síðu.
5. Þegar búið að velja síður fyrir prentunarröðina veldu **Næst**.



6. Veldu þína prentarastillingar. Síðu forskoðun uppfærir til að sýna núverandi stillingar.



- **Skilaboðaslá:** Aftengdu þessar stillingar til að fela skilaboðaslána á prentuðu síðunni/síðunum.
 - **Verkferastika:** Aftengdu þessar stillingar til að fela tækjastikuna á prentuðu síðunni/síðunum.
 - **Sýnileiki tengils:** Aftengdu þessar stillingar til að fela tenglavísatákn á tenglahnöppum á prentuðu síðunni/síðunum.
 - **Hnappanotkunartalning:** Virkjaðu þessa stillingu til að sýna núverandi hnappanotkunartalningu á prentuðu síðunni/síðunum. Athugaðu: Gagnarakning þarf að vera virkjuð til að sýna hnappanotkunartalningu.
7. Þegar þú hefur lokið að velja þínar prentarastillingar veldu **Prenta**.
 8. Veldu þinn prentara (eða prentaðu á PDF), litastillingar og síðu prentstefnu. Pappírs stærðarstillingar er hægt að finna undir **Frekari stillingar**.

Athugaðu: Þessi gluggi er breytilegur og fer eftir þínum vettvangi og sjálfvöldum prentarastillingum.

Þegar þú hefur lokið við að fínstilla prentarastillingarnar þínar, veldu **Prenta**.



12 Google Assistant

Uppgötvaðu kosti þess að hafa snjallaðstoð þökk sé samþættingu Google Assistant í TD Snap®. Fáðu strax aðgang að upplýsingum, skemmtun, umhverfisstjórnun og meira beint í gegnum hugbúnaðinn.



Frábending: TD Snap®, Google Assistant og öll tengd snjalltæki ættu aldrei að vera eina samskiptaleiðin fyrir notandann til að tjá mikilvægar upplýsingar.



TD Snap®, Google Assistant og öll tengd snjalltæki eða hátalarar á ekki að nota sem lífshjálparbúnað eða í öðrum mikilvægum tilgangi og skal ekki treysta á þau ef ske kynni að virkni minnkaði vegna orkutaps eða af öðrum orsökum.



Tobii Dynavox tekur enga ábyrgð á háttsemi notanda og hafnar allri ábyrgð vegna tjóns/eða skaða (þ.m.t., en er ekki takmarkað við, eignatjón, meiðsli og andlát) í tengslum við notkun á TD Snap®, Google Assistant, snjalltæki, hátalara eða einhver samsetning þeirra.



Ef einhver annar búnaður utan við Google hátalara er notaður, verður þú að hafa opið samskiptatæki. Fyrir aðstoð við að opna tækið hafðu þá samband við tækniðstoð Tobii Dynavox.

12.1 Tengdu Google aðganginn þinn

Til að nota Google Assistant, snjallhátalara og snjalltæki verður þú fyrst að skrá þig inn á Google aðganginn þinn í TD Snap®. Sjá kafla 14.11 *Google aðgangur*, síða 106.

12.2 Setja upp Google tækið þitt.

Farðu eftir leiðbeiningunum sem fylgdu tækinu þínu til að klára að setja það upp áður það er notað með TD Snap®.

12.3 Tungumálastuðningur Google Assistant

Það er mikilvægt að þú setjir upp Google Assistant með sama tungumáli og er talað við notkun á TD Snap®.



Áður en þú breytir tungumáli á Google Assistant skaltu athuga að farsíminn þinn og spjaldtölva séu tengd sama þráðlausa neti eða tengt sama reikning og Google Nest, Google Home hátalarinn þinn eða önnur tæki sem geta tengst Google Assistant.

Til að breyta tungumálinu fyrir Google Assistant:

1. Í farsímanum þínum, opnaðu **Google Home** eða **Google Assistant** forritið.
2. Efst til hægri, veldu reikninginn þinn > **Assistant stillingar**.
3. Veldu **Assistant > Tungumál**.
4. Veldu núverandi tungumál þitt.
5. Veldu nýtt tungumál.

Til að bæta við öðru tungumáli fyrir Assistant:

1. Í farsímanum þínum, opnaðu **Google Home** eða **Google Assistant** forritið.
2. Efst til hægri, veldu reikninginn þinn > **Assistant stillingar**.
3. Veldu **Assistant > Tungumál > Bæta við tungumáli**.
4. Veldu annað tungumál.



Þú getur tala við Google Assistant á hvoru tungumálinu en ekki blanda saman báðum tungumálunum í sama orðalagi.

12.4 Tala við Google Assistant

Við hvetjum við þig að byrja á að nota Google Assistant síðurnar okkar*. Þessar síður má finna á stjórnborðinu á flestum síðusetnum, þú getur líka hlaðið niður síðunum og flutt inn af mytobiidynavox.com/PagesetCentral. Google Assistant síðan inniheldur hnappa til að finna upplýsingar með Google Assistant, spila tónlist, hringja símtöl, heimilisstjórnun og fleira.

**Google Assistant og Google Assistant síðurnar eru ekki fáanlegar á öllum svæðum og tungumálum.*

Til að búa til þína eigin Google Assistant hnappa, sjá fyrir neðan.



Til nota Google Assistant verður þú að hafa nettengingu og vera skráður inn á Google reikninginn þinn í TD Snap® og öllum Google Assistant tengdum tækjum sem þú ætlar að nota.

Þú munt senda Google Assistant skipanir á aðeins mismunandi hátt, það er háð búnaði þínum. Vertu viss um að fylgja leiðbeiningunum fyrir tækið sem þú ert að nota. Skoðaðu táknin fyrir neðan til að finna skrefin sem eiga við þig.



Eingöngu Google Assistant aðgangur, engin viðbótabúnaður.



Google Nest Mini eða aðrir Google hátalarar.



Búðu til hnapp sem sendir fyrirfram forritaða Google Assistant skipun í Google hátalara.

Þessi valkostur hentar best fyrir Google Assistant skipanir sem verða notaðar oft en einu sinni.



Breyta hnappinn.

1. Veldu
2. Veldu hnapp.
3. Í skilaboðareitnum, skrifaðu skipunina sem þú vilt senda til Google Assistant. Skilaboðin verða að byrja á „Ok Google“, síðan spurningin eða skipunin.
4. Í aðgerðarhlutanum, veldu aðgerðina **tala eða setja inn skilaboð**.
5. Veldu **Alltaf tala**.



Til að senda sérstakar Google Assistant skipanir á ferðinni, fylgdu skrefunum hér að ofan til að búa til hnapp sem inniheldur eingöngu skilaboðin „Ok Google“, í notkunarham, sendu Google Assistant skipunina í skilaboðaglugganum, veldu Ok Google hnappinn og segðu síðan skilaboðagluggann til að senda skipunina.



Búðu til hnapp sem sendir skilaboðatexta hnappsins til Google Assistant á tækinu þínu.

Þessi valkostur hentar best fyrir Google Assistant skipanir sem verða notaðar oft en einu sinni.



Breyta hnappinn.

1. Veldu
2. Veldu hnapp.
3. Í skilaboðareitnum, skrifaðu skipunina sem þú vilt senda til Google Assistant. Ekki skrifa „Ok Google“, á undan spurningunni eða skipuninni.
4. Veldu **Bæta við aðgerð**.
5. Skrunaðu niður að umhverfisstjórnunarhlutanum og veldu **Sendu Google Assistant skipun**.
6. Veldu **Sendu skilaboðatexta hnapps til Google Assistant**.



Búðu til hnapp sem sendir texta skilaboðagluggans til Google Assistant á tækinu þínu.

Þessi tegund hnapps leyfir notandanum að semja sérstakar Google Assistant skipanir í skilaboðaglugganum og senda þær síðan til Google Assistant.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Bæta við aðgerð**.
4. Skrúnaðu niður að umhverfisstjórnunarhlutanum og veldu **Senda Google Assistant skipun**.
5. Veldu **Senda texta skilaboðaglugga til Google Assistant**.



Ef þú færð ekki niðurstöðurnar sem þú gerðir ráð fyrir, prófaðu að orða á annan hátt. Til dæmis „Ok Google, kvektu ljósin“ kveikti ekki á snjallperunni. Hins vegar, „Ok Google, kvektu ljósin í stofunni“ kveikti á snjallljósinu af því það hafði verið sett upp í stofunni í Google Home forritinu.

13 Deila og vista

TD Snap® býður upp á nokkrar þægilegar leiðir til að deila og vista notendur þína, síðusett og síður. Hvort sem þú vilt halda öllum síðusettunum mótsagnalausum yfir öll tæki þín eða senda nýjar síður til vinar, erum við með leið til þess!

- **Flytja út/inn staðbundið** (Notandi, síðusett, síðubúnt) — Nota þegar skrá er geymd á staðbundinni vél, deilt á USB-drifi eða með fólki sem er ekki með myTobiiDynavox reikning.
- **Flytja út/inn í gegnum myTobiiDynavox*** (Síðusett, síðubúnt) — Deila síðusettum og síðubúntum með öðrum notendum myTobiiDynavox. Geymdu og fáðu einkaaðgang að skrá á þínum eigin myTobiiDynavox reikningi.
- **Samstill*** (Síðusett) — deildu yfirstandandi breytingum á síðusetti með öllum tækjunum þínum og með sérstökum myTobiiDynavox notendum. Síðusett sem deilt er með samstillingum geymir dagréttu útgáfu af síðusettinu í skýinu, þannig að breytingar sem gerðar eru á síðusettinu á hverju sem er af samþykktum tækjum/reikningum er deilt yfir öll samstillt tæki/reikninga fyrir síðusettið.

*Þessar deiliaðferðir krefjast virkrar nettengingar.

Tafla 14: Skráargerðir fyrir deilingu og vistun — hvað innihalda þær

Skráargerðir	Síður	Kjörstillingar síðu	Kjörstillingar síðusetts	Kjörstillingar notanda	Kjörstillingar kerfis
Notandi	Já	Já	Já	Já	Nei
Síðusett	Já	Já	Já	Nei	Nei
Síðubúnt	Já (Ákveðnar síður)	Já	Nei	Nei	Nei

13.1 Notendur

Öryggisafrit notanda innihalda síðusett og stillingar sem tengjast notandanum. Öryggisafrit notanda innihalda ekki raddir. Hinsvegar eru raddstillingar geymdar og valinni rödd verður sjálfkrafa hlaðið niður ef hún er ekki tiltæk á tækinu (nettenging krafist).

Taka öryggisafrit af notanda

Sjá kafla 14.3 Taka öryggisafrit af notanda, síða 99.

Endurheimta notanda

Sjá kafla 14.4 Endurheimta notanda, síða 100.

13.2 Síðusett

Síðusettsskrá inniheldur allar síður sem tengjast síðusettinu. Það inniheldur engar notendaupplýsingar eða stillingar á notkunarstigi.

13.2.1 Flytja inn síðusett

Frá myTobiiDynavox



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu núverandi síðusett.
4. Veldu **Hlaða niður síðusetti**.
Þú gætir verið beðin/n um að skrá þig inn á TobiiDynavox.
5. Veldu síðusett úr listanum, veldu síðan **Niðurhal**.
6. Þegar niðurhali er lokið skaltu setja inn heiti fyrir síðusettið, veldu síðan **Save**.

Frá staðbundinni skrá



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðuset** flipann.
3. Veldu núverandi síðuset.
4. Veldu **Búa til síðuset**.
5. Veldu **Staðbundnar skrár** flipann.
6. Veldu **Vafra**.
7. Farðu í óskaða .sps skrá, veldu hana og veldu síðan **Opna**.
8. Veldu **Næst**.
9. Settu inn einkvæmt heiti fyrir síðusetið, veldu síðan **Búa til**.

13.2.2 Vista afrit af síðuseti

13.2.2.1 Vista síðuset hjá myTobiiDynavox

Síðusettskrá sem vistuð er hjá myTobiiDynavox má finna á myTobiiDynavox.com í Dótið mitt > Snap > síðuset



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðuset** flipann.
3. Veldu núverandi síðuset.
4. Veldu  **Vista** tákn við hlið síðusettsins sem þú vilt vista.
5. Veldu **Vista afrit í myTobiiDynavox**.
6. Settu inn einkvæmt heiti fyrir síðusetið og (valfrjálst) lýsingu, veldu síðan **Vista**.
7. Stöðuslá sýnir vistunarframvindu. Þegar þessu er lokið velurðu **Búið**.



Þú gætir verið beðin/n um að skrá þig inn á TobiiDynavox.

13.2.2.2 Vista síðuset staðbundið



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðuset** flipann.
3. Veldu núverandi síðuset.
4. Veldu  **Vista** tákn við hlið síðusettsins sem þú vilt vista.
5. Veldu **Vista afrit í staðbundna skrá**.
6. Settu inn einkvæmt heiti fyrir síðusetið og (valfrjálst) lýsingu, veldu síðan **Næst**.
7. Veldu **Vafra**. Farðu á skráasafnið þar sem þú vilt vista síðusetsskránnu og veldu síðan **Vista**.
8. Veldu **Vista**.
9. Stöðuslá sýnir vistunarframvindu. Þegar þessu er lokið velurðu **Búið**.

13.2.3 Deila afriti af síðuseti (í gegnum myTobiiDynavox)



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðuset** flipann.
3. Veldu  **Deila síðuseti** tákn við hlið síðusettsins sem þú vilt deila.
4. Veldu **Deila afriti**.

- Settu inn einkvæmt heiti fyrir síðusettið og (valfrjálst) lýsingu, veldu síðan **Næst**.
- Settu inn myTobiiDynavox notandanafnið eða netfangsreikning þess sem þú sendir síðusettið til, síðan velurðu + Til að bæta þeim við lista móttakenda. Endurtaktu þetta ferli til að bæta við fleiri móttakendum. Þegar þú hefur bætt við öllum móttakendum, velurðu **Deila**.
- Stöðuslá sýnir deilingarframvindu. Þegar þessu er lokið velurðu **Búið**.



Ef þú vilt vista afrit af síðusetti staðbundið (til að deila með USB-drifi, tölvupósti o.s.frv.), sjá kafla 13.2.2.2 Vista síðusett staðbundið, síða 93.

13.2.4 Samstilli síðusett

Samstilling er auðveld leið til að viðhalda sömu útgáfu af síðusetti á mörgum tækjum. Samstilling vistar dagréttu útgáfu af síðusettinu í skýinu. Þegar þú ýtir á samstillingarhnappinn, sendir þú breytingarnar sem þú gerðir á síðusettinu á staðbundnu tæki og færð líka allar breytingar sem voru gerðar á öðrum (samstilltum) *. Þegar öll tæki hafa samstillst, eru þau öll með sömu útgáfu af síðusettinu.

Samstillingarhnappurinn í efstu slánni lætur þig vita þegar til er uppfærð útgáfa af síðusettinu eða þegar þú ert með staðbundnar breytingar til að vista í skýið.

*Samstilling styður ekki sameiningu breytinga frá mörgum tækjum á sömu síðunni í sömu samstillingu. Ef breytingar eru gerðar á sömu síðu á sama tíma frá mörgum tækjum, mun síðasta tækið sem samstillir uppfæra síðuna með sinni útgáfu. Fólkið sem tekur þátt í að breyta samstilltu síðusetti ætti að ræða um það sín á milli um hvaða síðu er verið að breyta og samstilli oft til að forðast samstillingarbreytingar á sömu síðu á sama tíma.



Þegar samstillt er yfir mörg tæki eða notendur, verða stillingar yfirlitsgerðar að vera eins hjá öllum tækjum/notendum sem verið er að samstilli. Sjá kafla 14.13 Aðgangsaðferð, síða 108.



Samstilling virkar með síðusettum allt að 1 GB. Síðusett sem eru yfir 1 GB munu ekki samstillast.

13.2.4.1 Samstilli síðusett hjá myTobiiDynavox

Þegar þú samstillir síðu hjá myTobiiDynavox, verður þú með afrit að síðusettinu geymt á myTobiiDynavox miðaranum. Þú getur notað þetta sem fljótvirkt og auðvelt öryggisafritunarkerfi fyrir síðusett og ef þú ert með önnur tæki sem nota TD Snap®, getur þú samstillt síðusettin á þeim tækjum líka.

Stilling síðusetts á samstillingu



- Veldu **Samstilli** hnappinn í efstu stiku. Þú gætir verið beðin/n um að setja inn myTobiiDynavox notandanafn og aðgangsorð.
- Veldu **Samstilli**.
- Þetta er komið! Síðusettið er núna samstillt við myTobiiDynavox reikning þinn.



Í hvert skipti sem þú breytir síðusettinu verður þú að velja samstillingarhnappinn í efstu stiku til að senda breytingarnar í skýið.

Samstilli síðusett á aukatækjum

Ef síðusett er þegar stillt á samstillingu á einhverju af tækjum þínum getur þú samstillt fleiri tæki með því að fylgja skrefunum hér að neðan á hverju tæki fyrir sig.



- Veldu **Samstilli** hnappinn í efstu stiku. Þú gætir verið beðin/n um að setja inn myTobiiDynavox notandanafn og aðgangsorð.



- Veldu **Hlaða niður síðusetti** tákn.
 - Veldu síðuna sem þú vilt flytja ná í og samstilli og veldu síðan **Niðurhal**.
 - Þegar niðurhali er lokið, veldu **Búið**.
- Niðurhalaða samstillta síðusettið er sjálfkrafa stillt á að vera virkt síðusett.

 Í hvert skipti sem þú breytir síðusettnu verður þú að velja samstillingarhnappinn í efstu stiku til að senda breytingarnar í skýið og gera uppfærða síðusettið tiltækt til samstillingar fyrir önnur tæki. Það er best að samstillast áður en þú gerir breytingar á síðusettnu og samstillast svo aftur um leið og breytingum er lokið.

13.2.4.2 Bjóða einhverjum að samstillast við síðusettið þitt

Þegar aðrir myTobiiDynavox notendur samstillast við síðusettt þitt geta þeir gert breytingar á síðusettnu á tækjum sínum og samstillt þær breytingar við skýið. Næst þegar þú samstillir á tækinu þínu færðu þeirra breytingar. Eins þegar þú gerir breytingar á síðusettnu verða þessar breytingar tiltækar hinum notendunum sem þú hefur leyft að samstillast við síðusettt þitt.

Samstilling getur ekki sameinað breytingar frá mörgum notendum sem hafa breytt sömu síðu á sama tíma. Í þeim tilvikum verður yfirritar síðasti notandi sem gerði breytingar síðuna með sinni útgáfu. Þú ættir að samstillast strax áður og eftir að þú gerir breytingar á síðusetti og láta aðra notendur sem samstillast við síðusettið vita til að forðast að breyta sömu síðunni á sama tíma.

Þú ættir aðeins að samstillast við fólk sem þú treystir til að gera viðeigandi breytingar á síðusettnu.

 Í hvert skipti sem þú breytir síðusettnu verður þú að velja samstillingarhnappinn í efstu stiku til að senda breytingarnar í skýið og gera uppfærða síðusettið tiltækt til samstillingar fyrir önnur tæki eða notendur.

 Það er best að samstillast áður en þú gerir breytingar á síðusettnu og samstillast svo aftur um leið og breytingum er lokið.



1. Veldu **Samstillast** hnappinn í efstu stiku. Þú gætir verið beðin/n um að setja inn myTobiiDynavox notandanafn og aðgangsorð.



2. Veldu **Deila síðusetti** tákn.
3. Settu inn myTobiiDynavox notandanafn eða netfang þess sem þú deilir síðusettnu með, síðan velurðu + til að bæta þeim við lista móttakenda. Endurtaktu þetta ferli til að bæta við fleiri móttakendum. Þegar þú hefur bætt við öllum móttakendum, velurðu **Deila**.
4. Þegar deilingarferlinn er lokið, veldu **Búið**. Móttakendur fá deilutilkynningar með tölvupósti og í TD Snap® forritinu.

 Samstillingartilkynningar gætu tekið allt að klukkutíma að birtast eftir að boð hefur verið sent. Þú getur hvenær sem er athugað með tilkynningar með því að velja samstillingartáknið.

13.2.4.2.1 Afturkalla samstillingarleyfi

Þú getur fjarlægt notendur úr samstilltum síðusettum (sem þú átt) hvenær sem er.



1. Veldu **Samstillast** hnappinn í efstu stiku.



2. Veldu **Deila síðusetti** tákn.
3. Notendur með samstillingarleyfi fyrir núverandi síðusettt eru taldir upp í bláa kassanum. Til að fjarlægja notanda velurðu X við hliðina á nafni/netfangi þeirra og velur síðan **Uppfæra**.
4. Veldu **Búið**.

13.2.4.3 Samstillast við síðusettt í annarra eigu

Þegar einhver deilir með þér síðusetti til samstillingar sýnir samstillingartáknið í efstu stikunni tilkynningartákn



. Fylgdu skrefunum hér að neðan til að samþykkja eða hafna boðinu

Samstillingartilkynningar gætu tekið allt að klukkutíma að birtast eftir að boð hefur verið sent.

Samþykkja samstillingarboð



1. Veldu **Samstill** hnappinn í efstu stiku.



2. Veldu **Hlaða niður síðusetti** tákn.
3. Veldu **skoða síðuset** sem eru tiltæk á **myTobiiDynavox** reikningi þínum.
4. Veldu síðuna sem þú vilt flytja ná í og samstill og veldu síðan **Niðurhal**.
5. Þegar niðurhali er lokið, veldu **Búið**.

Hafna samstillingarboði



1. Veldu **Samstill** hnappinn í efstu stiku.



2. Veldu **Hlaða niður síðusetti** tákn.
3. Veldu **skoða síðuset** sem eru tiltæk á **myTobiiDynavox** reikningi þínum.
4. Veldu síðusettið sem þú vilt hafna og veldu síðan  **Eyða** tákn.
5. Veldu **Hafna**.

13.2.4.4 Snúa samstilltu síðusetti aftur í áður vistaða útgáfu

Þú getur farið aftur í áður vistaða útgáfu af samstilltu síðusetti. Þessi eiginleiki er gagnlegur ef þú hefur gert breytingar á síðusetti sem þú vilt henda eða afturkalla.



1. Veldu **Samstill** hnappinn í efstu stiku.
2. Veldu **Vistaðar útgáfur**.
3. Finndu samstillingardagsetninguna sem þú vilt endurheimta í listanum og veldu síðan **Endurheimta**.

13.2.4.5 Rita yfir samstillt síðuset

Notaðu rita yfir til að tryggja að núverandi útgáfa þín af síðusetinu er sú útgáfa af síðusetinu sem er einnig geymd í skýinu (burt séð frá breytingum sem gætu hafa verið samstilltar frá öðrum notendum).



1. Veldu **Samstill** hnappinn í efstu stiku.
2. Veldu **Ítarlegt**.
3. Veldu **Skrifa yfir**.

13.2.4.6 Sækja eingöngu samstilling

Þegar þú samstillir í sækja eingöngu ham færðu breytingar á síðusetti (sem gerðar eru á öðrum tækjum) en sendir engar breytingar á síðusetinu sem gerðar voru á núverandi tæki. Til að nota sækja eingöngu ham verður aðgangur að breytingarham að vera takmarkaður með aðgangskóða. Til að setja upp aðgangskóða og sækja eingöngu ham, sjá kafla *15.1.1 Aðgangskóði, síða 121..*

13.3 Síðubúnt

Þú getur deilt undirsetti af síðusetti þínu (ein eða fleiri síður að þínu vali) sem síðubúnti. Síðubúnt innihalda aðeins tiltekna síður. Ef síðurnar innihalda hnappa með tengla á síður sem eru ekki til á tæki viðtakanda gera tenglarnir ekki neitt.

13.3.1 Flytja út síðubúnt

Flyttu síðubúnt út til myTobiiDynavox



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflipan**.
3. Veldu **Flytja inn/út síður**.
4. Veldu **Flytja út síðubúnt**.
5. Veldu **Í myTobiiDynavox**.
6. Veldu síðurnar sem þú vilt hafa með í síðubúntinu. Valdar síður sýna gátmerki í listanum og birtast í bláu boxi. Núverandi síða er sjálfkrafa innifalin í síðubúntinu. Til að fjarlægja hana eða nokkra aðra síðu í síðubúntinu velurðu X við hliðina á heiti síðunnar í bláu boxinu.
7. Þegar þú hefur bætt viðeigandi síðum við síðubúntið, skaltu velja **Næst**. Gefðu síðubúntinu heiti svar opnast.
8. Settu inn heiti fyrir síðubúntið í heitireit og (valfrjálst) lýstu síðunum í lýsingarreitnum.
9. Veldu **Flytja út** til að vista síðubúntið hjá myTobiiDynavox.
10. Þegar útflytningi er lokið, veldu **Búið**.

Flyttu út síðubúnt í staðbundna skrá



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflipan**.
3. Veldu **Flytja inn/út síður**.
4. Veldu **Flytja út síðubúnt**.
5. Veldu **Í staðbundna skrá**.
6. Veldu síðurnar sem þú vilt hafa með í síðubúntinu. Valdar síður sýna gátmerki í listanum og birtast í bláu boxi. Núverandi síða er sjálfkrafa innifalin í síðubúntinu. Til að fjarlægja hana eða nokkra aðra síðu í síðubúntinu velurðu X við hliðina á heiti síðunnar í bláu boxinu.
7. Þegar þú hefur bætt viðeigandi síðum við síðubúntið, skaltu velja **Næst**. Gefðu síðubúntinu heiti svar opnast.
8. Settu inn heiti fyrir síðubúntið í heitireit og (valfrjálst) lýstu síðunum í lýsingarreitnum.
9. (Aðeins Windows) Veldu **Næst**.
10. (Aðeins Windows) Veldu **Vafra**. Farðu á skráasafnið þar sem þú vilt vista síðusettskránnar og veldu síðan **Vista**.
11. Veldu **Flytja út**.
12. Þegar útflytningi er lokið, veldu **Búið**.

Flytja út síðubúnt til deilingar (í gegnum myTobiiDynavox)



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflipan**.
3. Veldu **Flytja inn/út síður**.
4. Veldu **Flytja út síðubúnt**.
5. Veldu **Fyrir deilingu**.
6. Veldu síðurnar sem þú vilt hafa með í síðubúntinu. Valdar síður sýna gátmerki í listanum og birtast í bláu boxi. Núverandi síða er sjálfkrafa innifalin í síðubúntinu. Til að fjarlægja hana eða nokkra aðra síðu í síðubúntinu velurðu X við hliðina á heiti síðunnar í bláu boxinu.
7. Þegar þú hefur bætt viðeigandi síðum við síðubúntið, skaltu velja **Næst**. Gefðu síðubúntinu heiti svar opnast.
8. Settu inn heiti fyrir síðubúntið í heitireit og (valfrjálst) lýstu síðunum í lýsingarreitnum.
9. Veldu **Næst**. Deila síðubúnti svar opnast.
10. Settu inn myTobiiDynavox notandanafnið eða netfangsreikning þess sem þú sendir síðusettið til, síðan velurðu + Til að bæta þeim við lista móttakenda. Endurtaktu þetta ferli til að bæta við fleiri móttakendum. Þegar þú hefur bætt við öllum móttakendum, velurðu **Deila**.
11. Þegar útflytningi er lokið, veldu **Búið**.

13.3.2 Flytja inn síðubúnt

Flytja inn síðubúnt frá myTobiiDynavox

Notaðu þennan valkost til að flytja inn síðubúnt sem þú hefur vistað á myTobiiDynavox reikning þinn eða síðubúnt sem annar myTobiiDynavox notandi hefur deilt með þér.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflipann**.
3. Veldu **Flytja inn/út síður**.
4. Veldu **Flytja inn síðubúnt**.
5. Veldu **frá myTobiiDynavox**. Valið síðubúnt frá myTobiiDynavox svar opnast.
6. Veldu síðubúnt úr listanum.
7. Til að hlaða niður völdu síðubúnti, velurðu **Næst**.
8. Farðu yfir lista yfir síður sem eru í síðubúntinu. Til að halda áfram með innflutning síðubúnts, velurðu **Flytja inn**. Til að hætta við innflutning síðubúnts, velurðu **Hætta við**.



Síðuárekstur gerist þegar síðubúntið inniheldur eina eða fleiri síður sem eru þegar til á tækinu en eru ekki eins.



Veldu hvert síðuárekstur tákn veldu síðan hvort þú heldur síðunni sem er til eða skrifa yfir með innfluttu síðunni úr síðubúntinu. Þú þarft að leysa úr öllum síðuárekstrum á þennan hátt áður en þú getur haldið áfram með innflutning síðubúntsins.

Flytja inn síðubúnt frá staðbundinni skrá



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflipann**.
3. Veldu **Flytja inn/út síður**.
4. Veldu **Flytja inn síðubúnt**.
5. Veldu **frá staðbundinni skrá**.
6. Veldu **Vafra**. Finndu síðubúntskrána (.spb) sem þú vilt flytja inn og veldu hana, veldu síðan **Opna**.
7. Veldu **Næst**. Skoða síðubúnt svar opnast.
8. Farðu yfir lista yfir síður sem eru í síðubúntinu. Til að halda áfram með innflutning síðubúnts, velurðu **Flytja inn**. Til að hætta við innflutning síðubúnts, velurðu **Hætta við**.



Síðuárekstur gerist þegar síðubúntið inniheldur eina eða fleiri síður sem eru þegar til á tækinu en eru ekki eins.



Veldu hvert síðuárekstur tákn veldu síðan hvort þú heldur síðunni sem er til eða skrifa yfir með innfluttu síðunni úr síðubúntinu. Þú þarft að leysa úr öllum síðuárekstrum á þennan hátt áður en þú getur haldið áfram með innflutning síðubúntsins.

Flytja inn síðubúnt og tengja

Þú getur flutt inn síðubúnt og búið til tengil í einu lagi með flytja inn og tengja!

Sjá kafla 9.9.6 *Flytja inn og tengja á síðu, síða 64*.

14 Notandastillingar

Notandastillingar hjálpa til við að sérsníða notandaupplifun í TD Snap® hugbúnaðinum. Hver notandi getur haft eigin sérsníðnar stillingar sem eru notaðar þegar þú hefur notanda inn í hugbúnaðinn.

14.1 Breyta notanda



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu núverandi notanda.
4. Veldu notanda úr velja notanda listanum.



Notandinn með gátmerkið er núverandi virkur notandi.

14.2 Búa til nýjan notanda



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Nýr notandi**.
4. Fylgdu skrefunum í notandauppsetning leiðsagnarforritinu til að búa til nýjan notanda. Veldu **X** til að hætta við að búa til nýjan notanda.

14.3 Taka öryggisafrit af notanda


Öryggisafrita í myTobiiDynavox



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu örina hægra megin við núverandi notanda.
4. Veldu  **Öryggisafrita** hnappinn við hliðina á heiti notandans sem þú vilt taka öryggisafrit af.
5. Veldu **Öryggisafrita í myTobiiDynavox**.
6. Ef þú ert ekki skráð/ur inn á myTobiiDynavox reikninginn þinn verður þú beðin/n um að gera það núna. Settu inn heiti fyrir öryggisafritaskrá af notanda, veldu síðan **Næst**.
Það gæti verið gagnlegt að láta dagsetningu öryggisafritunar vera hluta af skráarheitinu.
7. Veldu **Búið**.



Einnig má færa staðbundna öryggisafritunarskrá handvirkt til myTobiiDynavox. Notaðu vafrann þinn til að fara á myTobiiDynavox.com og skráðu þig inn, farðu síðan á **Snap > afrit** og veldu **Hlaða upp afrit**.

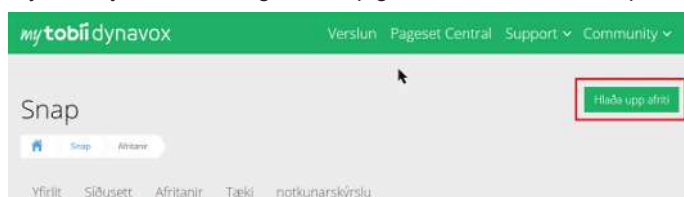

Öryggisafrita í staðbundna skrá



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu örina hægra megin við núverandi notanda.



4. Veldu **Öryggisafrita** hnappinn við hliðina á heiti notandans sem þú vilt taka öryggisafrit af.
5. Veldu **Öryggisafrita í staðbundna skrá**.
6. (Windows) **Vafra** til skrárinnar þar sem þú vilt vista öryggisafritsskránnu, veldu síðan **Vista**.
(iPadOS) Settu inn heiti fyrir öryggisafritsskránnu.
7. Veldu **Öryggisafrita**.

14.4 Endurheimta notanda

Endurheimta notanda frá myTobiiDynavox




1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu örina hægra megin við núverandi notanda.
4. Veldu **Nýr notandi**.
5. Veldu **Endurheimta Núverandi Notanda**.
6. Þú ert ekki skráð/ur inn á myTobiiDynavox, settu inn netfangið þitt og aðgangsorð og veldu síðan **Næst**.
7. Veldu notandaöryggisafritaskrá úr listanum og veldu síðan **Næst**.

Endurheimta notanda frá staðbundinni skrá



Í iPadOS verður fyrst að færa staðbundnar notandaöryggisafritaskrár sem voru búnar til í öðru tæki inn í TD Snap® forritið í gegnum iTunes:

- Opnaðu iTunes á makkanum eða PC-tölvunni.
- Tengdu iPad við tölvuna með USB-snúrunni sem kom með tækinu.
- Veldu tækið í iTunes.

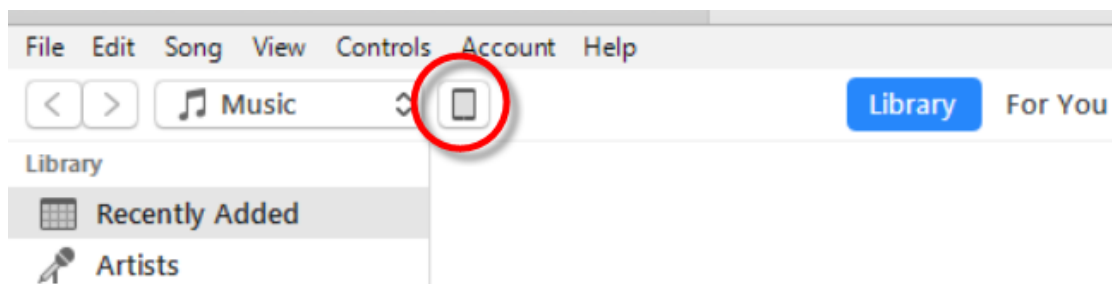


- Í vinstri hliðarstiku velurðu **Forrit**. Síðan skrunarðu niður að skráadeilhlutanum neðst á síðunni.
- Veldu **TD Snap®**.

File Sharing

The apps listed below can transfer documents between your iPad and this computer.

Apps

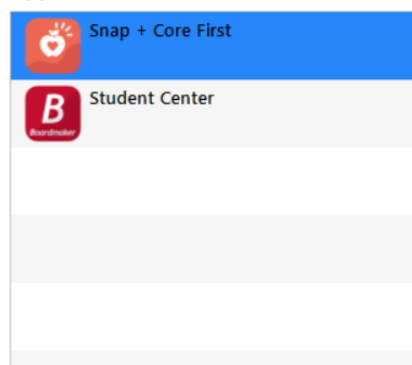

Snap + Core First Documents

DateTimePrefs.data	4 KB	Yesterday 4:12 PM
GlobalSettings.ssf	12 KB	Today 9:40 AM
QA_2017-04-20-17-39-12.sub	264.7 MB	4/20/2017 1:40 PM
Symbols	zero KB	5/31/2017 9:54 AM
UserBackups	545.5 MB	Yesterday 12:54 PM
Users	664.9 MB	Today 9:40 AM
VoiceBundle_v1_0.json	4 KB	5/31/2017 9:27 AM
Voices	244.7 MB	5/31/2017 9:53 AM

- Dragðu notandaöryggisafritaskrána(skrárnar) inn í TD Snap® skjalasvæði.
- Fylgdu skrefunum hér að neðan til að endurheimta notanda á iPad-inum.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu örina hægra megin við núverandi notanda.
4. Veldu **Nýr notandi**.
5. Veldu **Endurheimta Núverandi Notanda**.
6. Veldu **Endurheimta frá staðbundinni skrá**.
7. (Windows) Leitaðu að notanda öryggisafritaskránni og veldu hana, veldu síðan **Opna**.
(iPadOS) Veldu notandaöryggisafritaskrá úr listanum og veldu síðan **Endurheimta notanda**.

14.5 Breyta/Endurnefna notanda



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.



3. Veldu **Breyta** hnappinn við hliðina á nafni notandans sem þú vilt breyta.
4. Sláðu inn **Heiti** reitinn.
5. Veldu **Vista** til að vista breytingarnar eða **Hætta við** til að henda breytingunum.

14.6 Eyða notanda



Eyðing notanda úr tækinu er varanleg aðgerð. Ef þú heldur að þú gætir þurft notandann síðar, skaltu búa til öryggisafrit af notanda *14.3 Taka öryggisafrit af notanda, síða 99* áður en þú eyðir honum.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu  **Eyða** hnappinn við hliðina á nafni notandans sem þú vilt eyða.
4. Veldu rauða **Eyða** hnappinn.
5. Veldu **Eyða** til að eyða notanda varanlega. Veldu **Hætta við** til að fara aftur í stillingavalmynd án þess að eyða notanda.



Þú getur ekki eytt notanda sem er virkur núna.

14.7 Innskráning á myTobiiDynavox reikning



Innskráning á myTobiiDynavox reikning krefst virkrar nettengingar.

Sum þjónusta í TD Snap®, t.d. samstilling, krefst þess að þú skráir þig inn með myTobiiDynavox reikningi. Veldu **Skrá inn** til að setja inn myTobiiDynavox skilríki þín eða búa til nýja myTobiiDynavox reikning. Ef þú ert skráð/ur inn, sést myTobiiDynavox notandanafn þitt eða netfang í myTobiiDynavox reikningshlutanum.

14.8 Rödd

14.8.1 Talrödd

Talröddin er rödd sem les efni skilaboðaglugga og hnappaskilaboð.

Talrödd er sjálfgefin rödd, hún er ekki tengd sérstöku tungumáli. Ef tungumála-sértækum röddum hefur verið úthlutað verða tungumála-sértækar raddir notaðar í staðinn fyrir þau tungumál. Til að úthluta tungumála-sértækum röddum, sjá *14.10 Tungumála-sértækar raddir, síða 106*.



Skýringamynd 44: Notandaflipi — talrödd



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Talrödd**.

14.8.1.1 Uppsettar raddir

Þetta eru raddirnar sem eru núna tiltækar til tafarlausrar notkunar á tækinu. Þær ná bæði yfir foruppsettar raddir og raddir sem er halað niður á tækið.



Þú getur eytt röddum í uppsetningarlistanum en þú getur ekki eytt röddinni sem er virk núna.

14.8.1.2 Viðbótarraddir

Sjáðu talgervla og sérsniða raddþjónustu sem eru studdar í TD Snap®.

- Sérsniðnar raddir — TD Snap® (fullt) styður sumar sérsniðnar gerfi raddþjónustur. Veldu Skráðu þig inn til að byrja að nota sérsniðna gerfi raddþjónustu með TD Snap®.
- Talgervill — TD Snap® (fullt) inniheldur eina talvél og aðgang að öllum röddum sem tilheyra þeirri talvél.

14.8.1.3 Persónulegar raddir

TD Snap® styður iOS Persónulega rödd. iPadOS stillingin Leyfa forritum að biðja um notkun verður að vera virkjuð og leyfi veitt fyrir TD Snap®.

Til að búa til persónulega rödd skaltu fylgja leiðbeiningunum frá Apple: <https://support.apple.com/en-us/104993>. Athugaðu að ef þú býrð til persónulegu röddina með öðru Apple tæki verður þú að virkja stillinguna Share Across Devices til að nota röddina í öðrum tækjum sem eru skráð inn með sama Apple auðkenni. *iOS Settings > Accessibility > Personal Voice > Share Across Devices*

Virkja Leyfa forritum að biðja um að nota persónulega rödd

1. Hætta TD Snap®.
2. Farið í *iPadOS Settings > Accessibility > Personal Voice*.
3. Virkja **Leyfa forritum að biðja um að nota**
4. Lokaðu iPadOS Stillingar forritinu.

Leyfðu TD Snap að nota persónulega rödd

1. Ræsa TD Snap®.
2. Þegar beðið er um að leyfa TD Snap® til að nota persónulega rödd skaltu velja **Í LAGI**.



3. Veldu **Breyta** hnappinn.
4. Velja **Notandi** flipann.
5. Veldu **Talrödd**.
6. Í hlutanum Persónulegar raddir á raddlistanum skaltu velja persónulegu rödd þína.

14.8.1.4 Raddir sem hægt er að hala niður.

Ná í nýjar raddir.



Þú verður að vera með virka nettengingu til að ná í raddir.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Talrödd**.
4. Í lista yfir niðurhalanlegar raddir, skaltu velja **Niðurhal** við hliðina á viðeigandi rödd.



Í iPadOS, er hlé gert á niðurhali radda þegar TD Snap® forritið er minnkað.

14.8.1.5 Vettvangsraddir

Þetta eru raddir sem stýrikerfið þitt lætur þig hafa og SAPI5 raddir.



Sumar raddir koma tvisvar sinnum fyrir ef þær eru til bæði í innbyggðri vettvangsútgáfu og á SAPI5 útgáfu. SAPI5 er eingöngu fyrir Windows

14.8.2 Raddtíðni

Raddtíðni er hraðinn sem orð eru sögð á.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Færðu **Raddtíðni sleðarofi** til vinstri til að tala hægar eða til hægri til að tala hraðar.

14.8.3 Tónhæð raddar

Tónhæð vísar til þess hversu hátt eða lágt röddin hljómar.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Færðu **Tónhæðarsleða raddar** til vinstri til að stilla tónhæðina lægra, eða til hægri til að stilla tónhæðina hærra.

14.8.4 Undantekningar í framburði

Undantekningar í framburði eru orð eða skammstafanir sem þú kennir röddinni að bera fram á vissan hátt.

Undantekningar í framburði eru tengdar röddinni sem er virk þegar undantekningar í framburði eru búnar til. Ef þú skiptir í aðra rödd og vilt nota áfram sömu undantekningar í framburði verður þú að flytja undantekningar í framburði inn frá fyrri röddu.

Undantekningar í framburði eru líka tiltækar fyrir tungumála-sértækar raddir. Sjá kafla 14.10 Tungumála-sértækar raddir, síða 106.



Undantekningar í framburði er ekki hægt að flytja inn á milli stýrikerfa (Windows ↔ iPadOS).

Búa til nýja undantekningu í framburði



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Undantekningar í framburði**.
4. Veldu **Bæta við undantekningu í framburði**.
Bæta við undantekningu í framburði svarið birtist.

Bæta við undantekningu í framburði

Orð

Framburður

🔊

Lokið

Hætta við

5. Í **Orð** reitnum skaltu skrifa orðið eins og það er skrifað.
6. Í **Framburður** reitnum skaltu slá orðið inn hljóðfræðilega eins og þú vilt að það sé borið fram.
Til að prufa framburðinn velurðu **Forskoðunarhnappinn**.

7. Veldu **Búið** til að vista undantekningu í framburði Veldu **Hætta við** til að henda breytingum og fara aftur í notandastillingar.




Acapela raddir samþykkja einnig undantekningar á framburði með því að nota SAMPA hljóðstafrófið. Sláðu inn í reitinn Framburður `\prn=hljóðkóðar fara hér\` en skiptu út "hljóðkóðar fara hér" með SAMPA kóðanum fyrir orðið þitt. Þú verður að láta tilvitnunina ("") fylgja með í lokin.

Til að sjá hljóðkóðana og aðrar upplýsingar um notkun SAMPA fyrir framburðarundantekningar skaltu velja tungumál Acapela raddarinnar þinnar: [Arabíska](#), [Tékkneska](#), [Danska](#), [Þýska](#), [Áströlsk enska](#), [Skosk enska](#), [Bresk enska](#), [Amerísk enska](#), [Katalónska](#), [Rómönsk spænska](#), [Norður amerísk spænska](#), [Finnenska](#), [Kanadísk franska](#), [Franska](#), [Ítalska](#), [Japanska](#), [Norska](#), [Belgísk hollenska](#), [Hollenska](#), [Brasilísk portúgalska](#), [Portúgalska](#), [Sænska](#), [Finnisk sænska](#), [Norður samíska](#), [Tyrkneska](#), [Einfölduð kínverska](#).

Flytja inn undantekningu í framburði



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Undantekningar í framburði**.
4. Veldu **Flytja inn frá annarri rödd**.

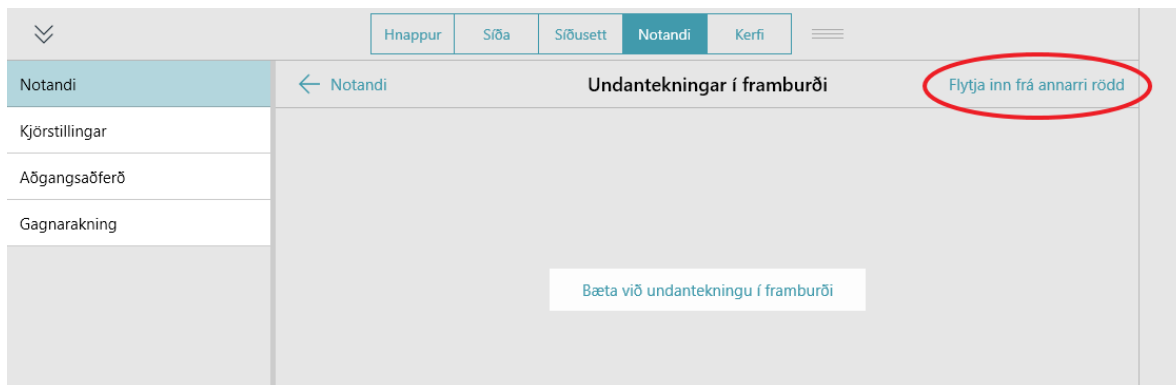

5. Veldu röddina sem hefur undantekningar í framburði sem þú vilt flytja inn. Aðeins raddir sem hafa tengdar undantekningar í framburði verða birtar í listanum.
6. Veldu **Flytja inn** til að flytja inn allar undantekningar í framburði sem tengjast valinni röddu. Veldu **Hætta við** til að fara aftur í notandastillingar án þess að flytja inn.



Þegar þú hefur flutt inn undantekningar í framburði frá annarri röddu, er mælt með að þú prufir þær með núverandi



röddu. Veldu röddu.

Forskoða hnappinn á undantekningu í framburði til að heyra hana talaða með núverandi

14.9 Úttakstæki tals



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Úttakstæki tals**.
4. Stilla Nota sjálfvalið tæki á **kveikt** til að nota sjálfvalið úttakstæki Windows. Stilla Nota sjálfvalið tæki á **slökkt** til að sjá lista yfir tiltæk úttaksstæki.
 - Veldu úttakstæki úr listanum til að nota tækið fyrir talúttak. Til að forskoða tæki skaltu velja spila hnappinn fyrir tækið.

14.10 Tungumála-sértækar raddir

Þú getur úthlutað rödd til tungumáls, þannig að efni á því tungumáli sé talað með réttum framburði.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Tungumála-sértækar raddir**.
4. Veldu **Bæta við rödd fyrir annað tungumál**.
5. Veldu **Tungumál**, veldu síðan tungumál úr tungumálista radda. Veldu **Ný rödd** eftir að þú hefur valið tungumálið.
6. Veldu **Rödd**, veldu síðan rödd úr uppsett hluta raddalistans. Veldu **Ný rödd** eftir að þú hefur valið rödd þína.
7. (Valfrjálst) stilltu raddtíðni fyrir valið tungumál/rödd.
8. (Valfrjálst) Bættu við undantekningum í framburði fyrir röddina. Sjá kafla 14.8.4 *Undantekningar í framburði, síða 104*.



Sumar raddir eru tiltækar sem ókeypis niðurhal (nettengingar krafist). Veldu **Niðurhal** við hlið viðeigandi raddar.. Þegar niðurhali er lokið, skaltu finna og velja röddina í uppsetthluta raddalistans.

14.11 Google aðgangur

Tengdu Google aðganginn þinn til að nota Google Assistant, snjallhátalara, og snjalltæki með TD Snap®.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Skrúnaðu niður og veldu **Tengjast Google** Sjálfgefinn vafri mun opnast.
4. Skrúðu þig inn á Google aðganginn þinn.
5. Þegar beðið er um það, veldu **Leyfa** til að gefa TD Snap® leyfi til að hafa samskipti við Google Assistant fyrir þína hönd.
6. Fara aftur í TD Snap®.



Til að skrá þig út úr Google aðganginum þínum í TD Snap®, veldu **Aftengja**.

14.12 Kjörstillingar notanda

14.12.1 Talstillingar



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Kjörstillingar** flokkur.
4. Stilltu alltaf trufla tal fyrir nýtt tal á **Kveikt** (Tal sem er í gangi mun stöðvast til að tala nýja skipun) eða **Slökkt** (talskipanir fara í röð þannig að núverandi tal mun klárast, síðan mæla nýju talskipunina).

14.12.2 Stillingar skilaboðaglugga



Skýringamynd 45: Notatákn í skilaboðaglugga virkjað



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Kjörstillingar** flokkur.
4. Stiltu eftirfarandi kjörstillingar á annað hvort **Kveikt** (virkt) eða **Slökkt** (óvirkt):
 - **Nota tákn í skilaboðaglugga** — þegar það er virkt verða orð og setningar í skilaboðaglugganum táknmyndaðar.
 - **Sýna alltaf bendilinn í skilaboðaglugganum** — Þegar hann er virkur er bendillinn alltaf sýnilegur í skilaboðaglugganum. Þegar það er óvirkt er bendillinn aðeins sýnilegur þegar hann er færður frá sjálfgefinni stöðu í lok texta skilaboðagluggans.
 - **Tala við innsetningu í skilaboðaglugga** — þegar þetta er virkt, verður hvert orð eða setning töluð þegar það er sett inn í skilaboðagluggann.
 - **Tala stafi** — þegar þetta er virkt, verður hver stafur talaður og settur inn í skilaboðagluggann.
Til að virkja „tala stafi“ þarf stillingin „tala við innsetningu í skilaboðaglugga“ að vera virkjuð.
 - **Hreinsa eftir tal** — Eftir að búið er að tala texta í skilaboðaglugga er textinn hreinsaður út og næsti texti settur inn.
 - **Sjálfkrafa hástöfun** — Þegar það er virkt er fyrsti stafur fyrsta orðs í hverri setningu sjálfkrafa settur í hástaf. Þegar það er óvirkt verður notandinn að slá inn hástafi handvirkt.

14.12.3 Spástillingar



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Kjörstillingar** flokkur.
4. Stilla sýna tákn á spáhnöppum á **Kveikt** (Spáhnappar sýna tákn fyrir núverandi spáð orð) eða **Slökkt** (Spáhnappar sýna aðeins texta).

14.12.4 Endurstilla orðaspá

Orðaspá í TD Snap® lærir af skilaboðunum sem talað er til að búa til sérsniðnar orðaspár. Að endurstilla orðaspá endurheimtir sjálfgefna orðaspá á öllum tungumálum fyrir núverandi notanda.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Kjörstillingar** flokkur.
4. Velja **Endurstilla orðaspá**.
5. Velja **Endurstilla**.
6. Veldu **Endurstilla** í staðfestingarglugganum.

14.12.5 Stillingar samstillingar



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Kjörstillingar** flokkur.
4. Stilla Virkja samstillingu í notkunarstillingu á **Kveikt** (Samstillingarhnappur er sýnilegur í efstu stiku í bæði notkunarham og breytingaham) eða **Slökkt** (Samstillingarhnappur er falinn í efstu stiku í notkunarham en sýnilegur í breytingaham).

14.13 Aðgangsaðferð

Snerting

Hlutir eru virkjaðir með því að snerta hlutinn á skjánum með fingri eða, þegar mús er notuð, með því að smella á hlutinn með músabendlinum. Þessi aðgangsaðferð hentar fyrir notendur sem geta snert skjáinn hratt og af nákvæmni eða stjórnað og vinstri smellið með venjulegri tölvumús. Hlutir eru virkjaði um leið og þeir eru snertir eða smellt er á þá.

Snerting innsláttur

Hlutir eru virkjaðir með því að snerta þá líkamlega og halda niðri hlutum á skjánum í lágmarkstíma eða, þegar mús er notuð, með því að smella og halda niðri hlutum í lágmarkstíma. Biðtíminn er stilltur inn af notanda. Þessi aðgangsaðferð er gagnleg fyrir notendur sem gætu snert eða smellt hluti óvart.

Snerting hætta

Þessi aðferð er lík halda við, en valinn hlutur er virkjaður þegar valinu er sleppt. Þessi aðferð gerir notanda kleift að halda snertingu við snertiskjáinn án þess að velja óvart. Þetta þýðir að notandi getur rennt fingri eða bendli yfir snertiskjáinn eða haldið niðri músahnappi á meðan hann færir bendilinn. Val verður ekki gert fyrr en fingri eða bendli er sleppt af snertiskjánum, eða þegar músahnappi er sleppt. Þetta gerir snerta út valaðferðina upplagða fyrir manneskju sem gæti fundist það auðveldara að draga fingur eða bendil yfir snertiskjá á meðan hún færir sig frá vali til vals.

Hljóðræn snerting

Notandinn snertir skjáinn til að virkja hljóðmerki hnappa sem hjálpa þeim að bera kennsl á hvern hnapp þannig að þeir geti valið af öryggi. Hægt er að stilla aðgangsaðferðarstillingarnar þannig að þær noti annað hvort snertingu og dragðu til að heyra hljóðmerki, lyftu síðan fingri af skjánum til að velja eða snertu einu sinni til að heyra hljóðmerkið og snertu síðan aftur til að velja. Þessi aðgangsaðferð er gagnleg fyrir notendur sem eru með skerta sjón eða þá sem njóta góðs af því að heyra hljóðmerki.

Músardvöl

Músadvalar aðgangsaðferð krefst þess að tölvumús, stýrikúla, eða höfuðmús stjórni bendlinum á skjánum. Hlutur er valinn þegar bendillinn staldrar við hlut í tiltekna tímalengd eða þegar notandi virkjar rofa. Þessi aðgangsaðferð er góður valkostur fyrir manneskju sem hefur líkamlega getu til að nota mús, en skortir getuna til að ýta niður á músahnappinn til að velja.

Eye Gaze (Augnstýring)

Þessi aðferð gerir notanda kleift að stjórna TD Snap® með augunum eingöngu. Val er gert með því annað hvort að festa augun á hlut í tiltekinn tíma (dvöl) eða með því að virkja rofa. Augnstýring krefst augnstýringartækis frá Tobii Dynavox.

Skönnun

Þegar skönnun er virk valaðferð, eru hlutir á skjánum auðkenndir í sérstöku mynstri. Skönnun krefst rofa eða lyklaborðslykils til að velja þegar viðeigandi hlutur er auðkenndur. Þessi aðgangsaðferð er ætluð einstaklingi sem hefur ekki hreyfigetu til að nota beinar valaðferðir á áhrifaríkan hátt.



Til að fá að vita meira um aðgangsaðferðir geturðu horft á aðgangsaðferðamyndbönd sem er að finna í *System — Help & Tutorials*.

14.13.1 Sjá aðgangsaðferð



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Aðgangsaðferð** flokkur.
4. Veldu núverandi aðgangsaðferð.
5. Veldu aðgangsaðferð úr listanum.

14.13.2 Snerti valkostur



Snerting er sjálfvalin aðgangsaðferð.

Þegar snerti aðgangsaðferð er notuð eru hlutir virkjaðir með því að snerta hlutinn á skjánum með fingri eða, þegar mús er notuð, með því að smella á hlutinn með músabendlinum. Þessi aðgangsaðferð hentar fyrir notendur sem geta snert skjáinn hratt og af nákvæmni eða stjórnað og vinstrismellt með venjulegri tölvumús. Hlutir eru virkjaði um leið og þeir eru snertir eða smellt er á þá.

Navigation Type

Yfirlitsgerðin er hvernig notandi getur skrunað á síðunni og tækjastikunni. Þú getur valið að skruna með því að renna fingri eftir skjánum, velja yfirlitshnappana eða bæði.

Strokur

- Skrunaðu upp og niður síðuna og tækjastikuna með því að renna fingri á snertiskjánum. (Aðeins með snertiaðgangi.)

Yfirlitshnappar

- Örvahnappar birtast á síðunni og tækjastikunni þegar það er meira efni fyrir ofan eða neðan. Örvayfirlitshnappar eru aðgengilegir öllum aðgangsaðferðum.



Strokur og yfirlitshnappar

- Bæði strokur og yfirlitshnappar eru virkjaðir þannig að nota má hvora yfirlitsgerð sem er til að færa upp og niður í gegnum efnið. (Aðeins með snertiaðgangi.)

Selection Feedback Sound

Spila hljóð þegar hnappur sem talar ekki er valinn.

14.13.3 Halda við valkostur

Þegar halda við er valin aðgangsaðferð, eru hlutir virkjaðir með því að snerta þá og halda niðri hlutnum á skjánum í lágmarkstíma eða, þegar mús er notuð, með því að smella og halda niðri hlutnum í lágmarkstíma. Biðtíminn er stilltur inn af notanda. Þessi aðgangsaðferð er gagnleg fyrir notendur sem gætu snert eða smellt hluti óvart.

dvalartími

Dvalartími er lágmarks tími sem þarf til að velja og halda niðri hlut til að virkja hann.

Tengja marga smelli

Þessi stilling skynjar marga smelli sem eiga sér stað innan tiltekins tímaramma og tengir þá þannig að þeir séu skráðir sem einn langur smelli og bið. Þessi stilling er gagnleg ef notandi á erfitt með að halda vali stöðugt.

Þegar tengja marga smelli er virkt getur þú valið tímaramman sem smellirnir eru tengdir saman í. Til dæmis þegar stillt er á meðalhraða eru allir smelli sem eiga sér stað innan 1,3 sekúndna tímabils (sem byrjar á fyrsta smellinum) skráðir sem einn langur smelli og bið.


Bið á milli vala

Þessi stilling gerir þér kleift að stilla inn tíma þar sem TD Snap® hunsar tilraunir til vals eftir að val hefur verið gert. Virkjun bils á milli vala getur hjálpað til við að koma í veg fyrir óviljandi endurtekið val í hugbúnaðinum.

Þegar bil á milli vala er virkjað getur þú valið tímarammann sem valtilraunir eru hunsaðar eftir að val hefur verið gert. Til dæmis, þegar stillt er á meðalhraða, mun TD Snap® hunsa allar valtilraunir sem eiga sér stað innan 2 sekúndna eftir val.

Auðkenning

Veldu viðeigandi auðkenningargerð og lit. Auðkenning er sjónrænt merki sem sýnir þegar hlutur er valinn. Auðkenning hættir þegar hluturinn hefur verið virkjaður.

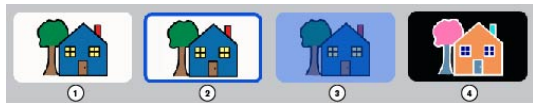

1. Engin auðkenning
2. Útlína
Valkostir: Litur, þykkt auðkenningar
3. Yfirlögn
Valkostur: Litur
4. Umsnúa

Valsvörunarhljóð

Spila hljóð þegar hnappur sem talar ekki er valinn.

Aðgengilegir fletthnappar á efstu stikunni

Þegar virkir eru aftur-, heima- og mælaborðshnapparnir á efstu stikunni aðgengilegir með því að nota snertiskrána eða snertiaðgangsaðferðina. Þegar þeir eru óvirkir eru þessir hnappar aðeins aðgengilegir með snertiaðgangsaðferðinni.

14.13.4 Snerta út valkostur

Þegar snerta út aðferðin er notuð er valinn hlutur virkjaður þegar valinu er sleppt. Þessi aðferð gerir notanda kleift að halda snertingu við snertiskjáinn án þess að velja óvart. Þetta þýðir að notandi getur rennt fingri eða bendli yfir snertiskjáinn eða haldið niðri músahnappi á meðan hann færir bendilinn. Þegar bendillinn færir sig yfir hnappana verður hnappurinn sem er núna valinn auðkenndur. Hnappur er ekki virkjaður fyrr en fingri eða bendli er sleppt af snertiskjánum, eða þegar músahnappi er sleppt. Þetta gerir snerta út valaðferðina upplagða fyrir manneskju sem gæti fundist það auðveldara að draga fingur eða bendil yfir snertiskjá á meðan hún færir sig frá vali til vals. Þetta er líka gagnlegt fyrir fólk sem hagnast af sjónrænni svörun til að gera nákvæmt val.

Hold Time

dvalartími er lágmarks tími sem þarf til að velja og halda niðri hlut til að virkja hann við sleppingu.

Connect Multiple Taps

Þessi stilling skynjar marga smelli sem eiga sér stað innan tiltekins tímaramma og tengir þá þannig að þeir séu skráðir sem einn langur smellur og bið. Þessi stilling er gagnleg ef notandi á erfitt með að halda vali stöðugt.

Þegar tengja marga smelli er virkt getur þú valið tímaramman sem smellirnir eru tengdir saman í. Til dæmis þegar stillt er að meðal eru allir smellir sem eiga sér stað innan 1,3 sekúndna tímabils (sem byrjar á fyrsta smellnum) skráðir sem einn langur smellur og bið.


Delay Between Selections

Þessi stilling gerir þér kleift að stilla inn tíma þar sem TD Snap® hunsar tilraunir til vals eftir að val hefur verið gert. Virkjun bils á milli vala getur hjálpað til við að koma í veg fyrir óviljandi endurtekið val í hugbúnaðinum.

Þegar bil á milli vala er virkjað getur þú valið tímarammann sem valtilraunir eru hunsaðar eftir að val hefur verið gert. Til dæmis, þegar stillt er á meðalhraða, mun TD Snap® hunsa allar valtilraunir sem eiga sér stað innan 2 sekúndna eftir val.

Highlighting

Veldu viðeigandi auðkenningargerð og lit. Auðkenning er sjónrænt merki sem sýnir þegar hlutur er valinn. Auðkenning hættir þegar hluturinn hefur verið virkjaður.

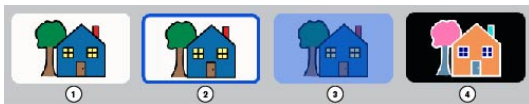

1. Engin auðkenning
2. Útlína
Valkostir: Litur, þykkt auðkenningar
3. Yfirlögn
Valkostur: Litur
4. Umsnúa

Audio Feedback

Stílltu röddina sem notuð er til að segja hljóðmerki. Hljóðmerki er orð eða stutt skilaboð sem hjálpa til við að þekkja hlutinn. Hægt er að velja rödd fyrir hljóðsvör, auk sérsniðinn raddhraða, hljóðstyrk, tónhæð og framburðarundantekningar.

Stillingin Blönuð endurgjöf og tal gerir kleift að spila endurgjafar hljóð á sama tíma og tal ef stillingar fyrir talúttakstæki og stillingar fyrir hljóðendurgjöf eru þær sömu.

Selection Feedback Sound

Spila hljóð þegar hnappur sem talar ekki er valinn.

Accessible Top Bar Navigation Buttons

Þegar virkir eru aftur-, heima- og mælaborðshnapparnir á efstu stikunni aðgengilegir með því að nota snerti út aðferðina eða snertiaðgangsaðferðina. Þegar þeir eru óvirkir eru þessir hnappar aðeins aðgengilegir með snertiaðgangsaðferðinni.

14.13.5 Valmöguleikar fyrir hljóðræna snertingu

Með hljóðrænni snertingu snertir notandinn skjáinn til að virkja hljóðmerki hnappa sem hjálpa þeim að bera kennsl á hvern hnapp þannig að þeir geti valið af öryggi. Hægt er að stilla aðgangsaðferðarstillingarnar þannig að þær noti annað hvort snertingu og dragðu til að heyra hljóðmerki, lyftu síðan fingri af skjánum til að velja eða snertu einu sinni til að heyra hljóðmerkið og snertu síðan aftur til að velja. Þessi aðgangsaðferð er gagnleg fyrir notendur sem eru með skerta sjón eða þá sem njóta góðs af því að heyra hljóðmerki.

Hold Time

Dvalartími er lágmarks tími sem þarf til að velja og halda niðri hlut til að virkja hann.

Connect Multiple Taps

Þessi stilling skynjar marga smelli sem eiga sér stað innan tiltekins tímaramma og tengir þá þannig að þeir séu skráðir sem einn langur smellur og bið. Þessi stilling er gagnleg ef notandi á erfitt með að halda vali stöðugt.

Þegar tengja marga smelli er virkt getur þú valið tímaramman sem smellirnir eru tengdir saman í. Til dæmis þegar stíllt er á meðalhraða eru allir smelli sem eiga sér stað innan 1,3 sekúndna tímabils (sem byrjar á fyrsta smellinum) skráðir sem einn langur smellur og bið.


Delay Between Selections

Þessi stilling gerir þér kleift að stilla inn tíma þar sem TD Snap® hunsar tilraunir til vals eftir að val hefur verið gert. Virkjun bils á milli vala getur hjálpað til við að koma í veg fyrir óviljandi endurtekið val í hugbúnaðinum.

Þegar bil á milli vala er virkjað getur þú valið tímarammann sem valtilraunir eru hunsaðar eftir að val hefur verið gert. Til dæmis, þegar stíllt er á meðalhraða, mun TD Snap® hunsa allar valtilraunir sem eiga sér stað innan 2 sekúndna eftir val.

Highlighting

Veldu viðeigandi auðkenningargerð og lit. Auðkenning er sjónrænt merki sem sýnir þegar hlutur er valinn. Auðkenning hættir þegar hluturinn hefur verið virkjaður.

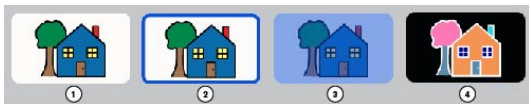

1. Engin auðkenning
2. Útlína
Valkostir: Litur, þykkt auðkenningar
3. Yfirlögn
Valkostur: Litur
4. Umsnúa

Audio Feedback

Stilltu röddina sem notuð er til að segja hljóðmerki. Hljóðmerki er orð eða stutt skilaboð sem hjálpa til við að þekkja hlutinn. Hægt er að velja rödd fyrir hljóðsvörun, auk sérsniðinn raddhraða, hljóðstyrk, tónhæð og framburðarundantekningar.

Stillingin Blönuð endurgjöf og tal gerir kleift að spila endurgjafar hljóð á sama tíma og tal ef stillingar fyrir talúttakstæki og stillingar fyrir hljóðendurgjöf eru þær sömu.

Button Boundary Feedback Sound

Spilaðu hljóð þegar þú ferð yfir brún hnapps.

Selection Feedback Sound

Spila hljóð þegar hnappur sem talar ekki er valinn.

Play audio cue on first selection

Þegar virkt, undirstrikar fyrsta valið hnappinn og spilar hljóðmerki; annað val virkjar hnappinn. Þegar óvirkt, ýttu og haltu inni (eða pikkaðu og dragðu) spilar hljóðmerkið; með því að sleppa pikki (lyfta fingri af skjánum) virkjar hnappinn.

Accessible Top Bar Navigation Buttons

Þegar virkt eru aftur-, heima- og mælaborðshnapparnir á efstu stikunni aðgengilegir með því að nota snertiaðgangsaðferðir okkar með hljóðrænni snertingu. Þegar þeir eru óvirkir eru þessir hnappar aðeins aðgengilegir með snertiaðgangsaðferðinni.

14.13.6 Músadvöl valkostir

Músadvalar aðgangsaðferð krefst þess að tölvumús, stýrikúla, eða höfuðmús stjórni bendlinum á skjánum. Hlutur er valinn þegar bendillinn staldrar við hlut í tiltekna tímalengd eða þegar rofi er virkjaður.

Selection Type

Dvelja

- Val er gert með því að halda bendli á hlut í tiltekinn tíma (dvöl).
 - Dwell time — set the amount of time that the cursor must remain on an object in order to select it.

Rofi


- Val er gert með því að virkja rofa á meðan bendillinn er á viðeigandi hlut.
 - Switch input — set the keyboard key that acts as the switch input.

Highlighting

Veldu viðeigandi auðkenningargerð og lit. Auðkenning er sjónrænt merki sem sýnir þegar hlutur er valinn. Auðkenning hættir þegar hluturinn hefur verið virkjaður.



Fyrir þessa aðgangsaðferð er „Ekki auðkenna“ ekki valkostur.

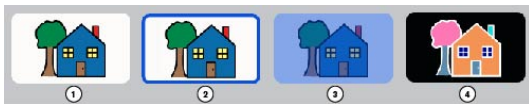

1. Engin auðkenning
2. Útlína
Valkostir: Litur, þykkt auðkenningar
3. Yfirlögn
Valkostur: Litur
4. Umsnúa

Audio Feedback

Stilltu röddina sem notuð er til að segja hljóðmerki. Hljóðmerki er orð eða stutt skilaboð sem hjálpa til við að þekkja hlutinn. Hægt er að velja rödd fyrir hljóðsvörun, auk sérsniðinn raddhraða, hljóðstyrk, tónhæð og framburðarundantekningar.

Stillingin Blönuð endurgjöf og tal gerir kleift að spila endurgjafar hljóð á sama tíma og tal ef stillingar fyrir talúttakstæki og stillingar fyrir hljóðendurgjöf eru þær sömu.

Show Pause Access Method Button in Use Mode

Þegar þetta er virkt, birtist hlé/byrja aftur aðgangsaðferðarhnappur á efstu slánni í notkunarham. Þegar þetta er óvirkt er hnappurinn falinn.

Selection Feedback Sound

Spila hljóð þegar hnappur sem talar ekki er valinn.

Accessible Top Bar Navigation Buttons

Þegar virkt eru aftur-, heima- og mælaborðshnapparnir í efstu stikunni aðgengilegir með því að nota músadvalar- eða snertiaðgangsaðferðir. Þegar þeir eru óvirkir eru þessir hnappar aðeins aðgengilegir með snertiaðgangsaðferðinni.

14.13.7 Stillingar augnstýringar

Þessi aðgangsaðferð gerir notanda kleift að stjórna TD Snap® með augunum eingöngu. Val er gert með því annað hvort að festa augun á hlut í tiltekinn tíma (dvöl) eða með virkja rofa því að. Augnstýring sem aðgangsaðferð krefst augnstýringartækis frá Tobii Dynavox.

Selection Type

Dvelja

- Gerir notanda kleift að velja með því að festa augun á hlut í tiltekinn tíma (dvalartími).
 - Dwell time — set the amount of time that the gaze must remain on an object in order to select it.
 - Look away before reselecting — when enabled, the user is unable to make multiple selections on the same target unless they look away from the last selected region between selections. This setting is helpful for users who accidentally select targets repeatedly.

Rofi

- Notandi beinir auðkenningu á skjánum með augntilliti og velur síðan með rofa.
 - Switch input — set the keyboard key that acts as the switch input.
Switch selection with a keyboard key or Bluetooth switch may not work outside the TD Snap® software.
 - Switch press duration — the amount of time that the switch must be activated to select the currently highlighted object.
 - Switch repeat duration — the amount of time the user must wait between switch activations. Before this time is met, any additional switch activations are ignored.

Gaze Feedback

Augnsvörun er sjónrænt merki sem sýnir notanda hvar augntillit þeirra er skráð á skjánum, hversu stöðugt og í hvað langan tíma.

Stilltu inn stíl, lit og stærð augnsvörunar.

Delay After Page Change

Eftir að farið er á nýja síðu getur val ekki átt sér stað í tiltekinn tíma. Þetta kemur í veg fyrir óviljandi val þegar síða opnast fyrst.

Windows Control Type

Stillir inn aðgangsstjórnun skjáborðs fyrir yfirlit utan TD Snap® hugbúnað. Ekki tiltækt í öllum tækjum.

- Augntillitsval — þetta er tveggja skrefa valaðferð sem dregur úr hættunni á óviljandi smellum.
- Músafermun — hermir eftir og stjórnar venjulegum PC-músabendli á skjánum.

Audio Feedback

Stilltu röddina sem notuð er til að segja hljóðmerki. Hljóðmerki er orð eða stutt skilaboð sem hjálpa til við að þekkja hlutinn. Hægt er að velja rödd fyrir hljóðsvörun, auk sérsniðinn raddhraða, hljóðstyrk, tónhæð og framburðarundantekningar.

Stillingin Blönuð endurgjöf og tal gerir kleift að spila endurgjafar hljóð á sama tíma og tal ef stillingar fyrir talúttakstæki og stillingar fyrir hljóðendurgjöf eru þær sömu.

Show Pause Access Method Button in Use Mode

Þegar þetta er virkt, birtist hlé/byrja aftur aðgangsaðferðarhnappur á efstu slánni í notkunarham. Þegar þetta er óvirkt er hnappurinn falinn.

Selection Feedback Sound

Spila hljóð þegar hnappur sem talar ekki er valinn.

Accessible Top Bar Navigation Buttons

Þegar virkt eru aftur-, heima- og mælaborðshnapparnir á efstu stikunni aðgengilegir með því að nota augnstýringu eða snertiaðgangsaðferðir. Þegar þeir eru óvirkir eru þessir hnappar aðeins aðgengilegir með snertiaðgangsaðferðinni.

Offscreen Pause

Þegar virkt, geta notendur augnstýringar horft fyrir neðan skjáinn til að opna valmynd sem inniheldur hnappinn Hlé/Halda áfram Augnstýringu.

14.13.8 Skönnunar valmöguleikar

Þegar skönnun er virk valaðferð, eru hlutir á skjánum auðkenndir í sérstöku mynstri. Notandi virkjar rofa eða lyklaborðslykil til að velja þegar viðeigandi hlutur er auðkenndur. Þessi aðgangsaðferð er ætluð einstaklingi sem hefur ekki hreyfigetu til að nota beinar valaðferðir á áhrifaríkan hátt.

Scan Type

Skönnunartegundarstilling ákvarðar hvernig skönnunar auðkenning fer áfram (sjálfvirkt eða með rofavali) og hvernig val er framkvæmt.

1 rofa sjálfvirk skönnun

- Þegar 1 rofa sjálfvirk skönnun er notuð, mun hugbúnaðurinn skanna hlutina á síðunni með þar til gerðu skönnunarmynstri. Notandi velur með rofa.
 - Switch input — choose either a screen tap or keyboard key.
 - Speed — set how quickly the autoscan progresses.

- Transition time — set the length of time between making a selection and autoscan continuing.
- Scan after — select when autoscan should restart: Selection, Page Change, Speaking.
 - Scan After Speaking Begins has three options: Wait for switch activation (resume scanning after speaking begins only when the switch has been activated), Immediately (continue scanning regardless of speech), Wait for speech to finish (resume scanning after speech has finished).
- If Audio Feedback is enabled, audio feedback is not heard if scanning occurs while other speech is playing.
- Speak full audio cue before advancing — when enabled, long audio cues delay the scanning highlight advancement until the full audio cue has been spoken.

2 rofa skrefa skönnun

- Þegar tveggja skipta skrefa skönnun er notuð mun notandi virkja einn rofa til að halda áfram með skönnunarauðkenningu og annan rofa til að velja.
 - Switch 1 Input — choose either a screen tap or keyboard key to progress the scan highlight.
 - Switch 2 Input — choose either a screen tap or keyboard key to make selections.
- Switch 1 Input and Switch 2 Input must be different.

1 rofa skönnun

- Þegar 1 rofa skönnun valkosturinn er virkur, notar notandi rofann til að fara áfram með auðkenninguna (hvert val fer með auðkenninguna áfram um eitt bil). Til að velja auðkenndan hlut velur notandi rofann og viðheldur valinu í tiltekinn hléttíma.
 - Switch 1 Input — choose either a screen tap or keyboard key to progress the scan highlight.
 - Pause Time — the minimum amount of time needed to select and hold on an object in order to activate it.

1 rofa dvalar skönnun

- Þegar 1 rofa dvalarskönnun valkosturinn er virkur, notar notandi rofann til að fara áfram með auðkenninguna (hvert val fer með auðkenninguna áfram um eitt bil). Til að velja auðkenndan hlut gerir notandi hlé (gerir ekkert) í tiltekinn hléttíma.
 - Switch 1 Input — choose either a screen tap or keyboard key to progress the scan highlight.
 - Pause Time — the minimum amount of time needed to dwell on an object in order to activate it.

Öfug skönnun

- Einstaklingur sem notar öfuga skönnun heldur niðri rofanum til að fara áfram með skönnunarauðkenninguna (auðkenningin heldur áfram að færast áfram á meðan rofanum er haldið niðri). Þegar einstaklingur sleppir rofanum verður auðkenndi hluturinn valinn.
 - Switch 1 Input — choose either a screen tap or keyboard key to progress the scan highlight.
 - Speed — how fast the scanning highlight advances (while the switch is held).
 - Speak full audio cue before advancing — when enabled, long audio cues delay the scanning highlight advancement until the full audio cue has been spoken.

Scan Behaviors

Skönnunarmynstrið er röðin sem hlutir á skjánum eru auðkenndir í fyrir val. Þessi hluti inniheldur einnig stillingar sem tengjast því hverskonar hlutir eru skannaðir.

Mynstur

- Röð/dálgur — skannar raðir ofan frá og niður Þegar röð er valin eru hlutirnir í röðinni skannaðir frá vinstri til hægri.
- Dálgur/röð — skannar dálka frá vinstri til hægri. Þegar dálkur er valinn eru hlutirnir í dálknum skannaðir ofan frá og niður.
- Línulega — hlutir eru skannaðir hver fyrir sig frá vinstri til hægri, ofan frá og niður.

Fjöldi yfirferða

- Yfirferðir — stilltu hversu mörgum sinnum skönnunin mun skanna röð eða dálk án þess að valið sé.
- Eftir loka yfirferð — veldu hvað gerist þegar sjálfvirk skönnun hefur lokið tilteknum fjölda yfirferða (ekki tiltækt fyrir óendanlegar yfirferðir).

Hóp skönnun

- Þegar hún er virk eru síðuhnaðarnir skannaðir í hópa.

Skannaðir hópar verða að vera tilgreindir fyrirfram. Sjá kafla 9.16 *Skannaðir hópar, síða 73*.

Skanna frá síðasta vali

- Þegar þetta er virkt mun skönnun hefjast aftur á síðunni þar sem síðasta val var gert. Þegar þetta er óvirkt byrjar skönnun aftur efst á síðunni eftir að valið er.

Skanna slá að ofan

- Þegar þetta er virkt eru hlutir sem hægt er að skanna í efstu stiku (til baka, heim og stjórnborð) skannaðir. Þegar þetta er óvirkt eru hlutir í efstu stiku ekki skannaðir.



Leita, samstillta, gera hlé á aðgangsaðferð og breyta hnapparnir í efstu stiku ekki skannaðir. Þá má alltaf nota með snertingu.


Skanna tóma hnappa

- Þegar þetta er virkt eru hnappar sem hafa ekkert efni skannaðir. Þegar þetta er óvirkt eru tómir hnappar ekki skannaðir.

Highlighting

Veldu viðeigandi auðkenningargerð og lit. Auðkenning er sjónrænt merki sem sýnir þegar hlutur er skannaður. Auðkenning hættir þegar hluturinn hefur verið virkjaður.

Fyrir þessa aðgangsaðferð er „Ekki auðkenna“ ekki valkostur.

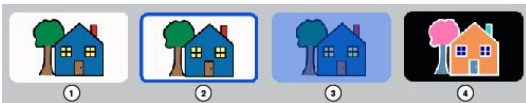

1. Engin auðkenning
2. Útlína
Valkostir: Litur, þykkt auðkenningar
3. Yfirlögn
Valkostur: Litur
4. Umsnúa

Hold Time

Dvalartími er lágmarks tími sem þarf til að velja og halda niðri hlut til að virkja hann.

Delay Between Selections

Bil á milli vala hjálpar til við að koma í veg fyrir að rofaval sé óvart tvítekið. Þegar rofaval er gert, getur næsta rofaval ekki átt sér stað fyrr en tíminn sem stilltur er inn í bið á milli vala er liðinn. Ef ýtt er á rofann á meðan biðtími er í gangi endurræstist niðurtalningin.

Audio Feedback

Stilltu röddina sem notuð er til að segja hljóðmerki. Hljóðmerki er orð eða stutt skilaboð sem hjálpa til við að þekkja hlutinn. Hægt er að velja rödd fyrir hljóðsvörun, auk sérsniðinn raddhraða, hljóðstyrk, tónhæð og framburðarundantekningar.

Stillingin Blönuð endurgjöf og tal gerir kleift að spila endurgjafar hljóð á sama tíma og tal ef stillingar fyrir talúttakstæki og stillingar fyrir hljóðendurgjöf eru þær sömu.

Zoom

Þegar hún er virk eru þysjað að skjáhlutum þegar þeir eru skannaðir. Þegar margir hlutir eru skannaðir (raðir eða dálkar) er þysjað að fyrsta hlutnum í mynstrinu og hinir auðkenndir eins og tiltekið er í stillingum auðkennisstíl.

Show Pause Access Method Button in Use Mode

Þegar þetta er virkt, birtist hlé/þyrja aftur aðgangsaðferðarhnappur á efstu slánni í notkunarham. Þegar þetta er óvirkt er hnappurinn falinn.

Selection Feedback Sound

Spila hljóð þegar hnappur sem talar ekki er valinn.


14.14 Gagnarakning

14.14.1 Vöktun hnappanotkunar

Þegar vöktun hnappanotkunar er virk eru upplýsingar um hnappanotkun í TD Snap® skrásettar. Þessar upplýsingar innihalda tíma hnappanotkunarinnar, skilaboðin, tungumál, síðuset, síðu, rúðustaðsetningu, aðgangsaðferð (t.d. augnstýringu), sýningarham og hvort hnappurinn talaði eða setti inn í skilaboðagluggann.



Hnappanotkunarupplýsingar eru ekki skrásettar í breytingarham.

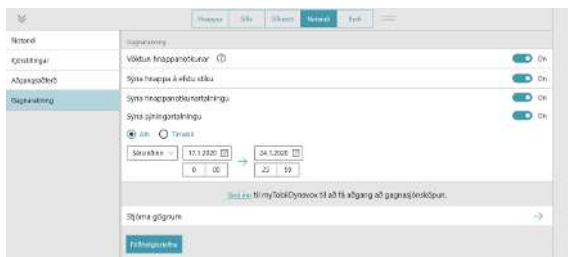

Virkja vöktun hnappanotkunar



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Gagnarakning** flokkur.
4. Setja **Vöktun hnappanotkunar** á kveikt.
5. Lestu gagnaverndarviðvörðunina og veldu **Já** til að virkja vöktun hnappanotkunar. Ef þú vilt ekki virkja vöktun hnappanotkunar, skaltu velja nei.



Hægt er að skoða hnappanotkunartalningu í TD Snap® hugbúnaðinum með því að virkja sýna hnappanotkunartalningu og/eða sýningartalningu. Fyrir frekari upplýsingar sjá kafla 14.14.3 *Sýna hnappanotkunartalningu*, síða 118 og 14.14.4 *Sýna sýningartalningu*, síða 119. Frekari gagnasjónsköpun er tiltæk í **notkunarskýrsluhluta** myTobiiDynavox.com reikningi þínum.

Þegar vöktun hnappanotkunar er virk á hún sér alltaf stað þegar TD Snap® hugbúnaðurinn er notaður. Fyrir nákvæm notkunargögn er mikilvægt að aðgreina á milli hnappavals notanda og sýningarvals umönnunaraðila eða tjáskiptafélaga. Ef notandi á tjáskipti við TD Snap® í gegnum aðgangsaðferð sem byggir ekki á snertingu (músadvöl, augnstýring, eða skönnun) er hverskonar hnappaval sem gert er með snertingu sjálfvirkt skrásett sem sýning. Ef notandi á tjáskipti við TD Snap® í gegnum aðgangsaðferð sem byggir á snertingu verður umönnunaraðili að virkja sýningarham áður en hann sýnir eitthvert val og afvirkja hann síðan aftur áður en notandi velur næst.



Ef vöktun hnappanotkunar er virkjuð og notandi hefur aðgangsaðferð sem byggir á snertingu skaltu passa að sýna hnappa á efstu stíku sé líka virkjuð. Sjá kafla 14.14.2 *Sýna hnappa á efstu stíku*, síða 118.



Þegar þú deilir síðuseti sem hefur notkunargögn hefur þú möguleika á að hafa notkunargögnin með eða ekki.

Virkja sýningarham (aðeins nauðsynlegt ef aðgangsaðferð er stillt á snertingu, halda við, snerta út eða þegar skjárin er notaður sem rofi)



Ef núverandi aðgangsaðferð inniheldur gera hlé á aðgangsaðferð hnapp í efstu stiku, skaltu gera hlé á



aðgangsaðferð

áður en þú byrjar á skrefunum hér að neðan. Hættu við hlé á aðgangsaðferð



áður en þú ferð úr sýningarham.



1. Veldu **Gagnarakning** hnappinn í efstu stiku.
Til að virkja gagnarakningar hnappinn í efstu stiku, sjá kafla Sýna hnappa á efstu stiku..
2. Virkja **Sýningarhamur**.
Þegar þú hefur lokið sýningu skaltu muna að afvirkja sýningarham.



Þú getur einnig kveikt og slökkt á sýningarham með því að gera langan smell (smella og halda) á gagnarakningarhnappinn í efstu stiku. Þegar sýningarhamur er virkur lítur gagnarakningarhnappurinn svona út




. Þegar sýningarhamur er óvirkur lítur gagnarakningarhnappurinn svona út



14.14.2 Sýna hnappa á efstu stiku



Þegar hann er virkjaður, mun Birtist gagnarakningarhnappurinn í efstu stiku. Gagnarakningarhnappurinn í efstu stiku gefur fljótlegan aðgang að eftirfarandi stillingum: Sýningarham, sýna hnappanotkunartalningu, sýna sýningartalningu og stjórna gögnum.

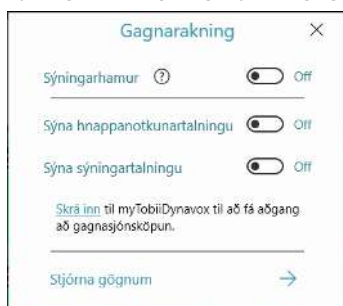

14.14.3 Sýna hnappanotkunartalningu

Þegar hann er virkjaður sýna hnappar hvítt merki með fjölda skipta sem hnappurinn var valinn af notanda (á meðan vöktun hnappanotkunar var virkjuð) í tilteknum tímaramma. Sjálfvalinn tímarammi er allt.

Virkja sýna hnappanotkunartalningu (í notandastillingum)



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Gagnarakning** flokkur.
4. Setja **Sýna hnappanotkunartalningu** á kveikt.



Til að breyta tímabili notkunartalningar, skaltu velja **Tímabil**, og nota síðan fellilistavalmyndina eða reitina með upphafs- og lokadagsetningu/-tíma.

Virkja sýna hnappanotkunartalningu (í gegnum gagnarakningarhnappinn í efstu stiku)



Til að virkja gagnarakningar hnappinn í efstu stiku, sjá kafla Sýna hnappa á efstu stiku..




1. Veldu **Gagnarakning** hnappinn í efstu stiku.
2. Virkja **Sýna hnappanotkunartalningu**.



Til að virkja gagnarakningar hnappinn í efstu stiku, sjá kafla Sýna hnappa á efstu stiku..



Til að breyta tímabili notkunartalningar, skaltu velja **Tímabil**, og nota síðan fellilistavalmyndina eða reitina með upphafs- og lokadagsetningu/-tíma.

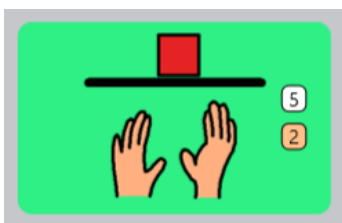

Skýringamynd 46: Hnappur sýnir notkunartalningu (hvítt) og sýningartalningu (appelsínugult).

14.14.4 Sýna sýningartalningu

Þegar hann er virkjaður sýna hnappar appelsínugult merki með fjölda skipta sem hnappurinn var valinn í sýningarham (á meðan vöktun hnappanotkunar var virkjuð) í tilteknum tímaramma. Sjálfvalinn tímarammi er allt.

Virkja sýna sýningartalningu (í notandastillingum)



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Gagnarakning** flokkur.
4. Setja **Sýna sýningartalningu** á kveikt.



Til að breyta tímabili sýningartalningar, skaltu velja **Tímabil**, og nota síðan fellilistavalmyndina eða reitina með upphafs- og lokadagsetningu/-tíma.

Virkja sýna sýningartalningu (í gegnum gagnarakningarhnappinn í efstu stiku)



Til að virkja gagnarakningar hnappinn í efstu stiku, sjá kafla Sýna hnappa á efstu stiku..



1. Veldu **Gagnarakning** hnappinn í efstu stiku.
2. Virkja **Sýna sýningartalningu**.



Til að breyta tímabili sýningartalningar, skaltu velja **Tímabil**, og nota síðan fellilistavalmyndina eða reitina með upphafs- og lokadagsetningu/-tíma.

14.14.5 Stjórna gögnum

Endurstilla hnappanotkunartalningu og sýningartalningu á núll fyrir núverandi síðu, hnappa á skilaboðaslá, hnappa á tækjastiku eða allt síðusettið.



Endurstilling hnappanotkunartalningar eyðir ekki fyrri notkunargögnum. Ef þú vilt eyða öllum notkunargögnum sem hafa verið geymd á mytobiidynavox reikningi þínum varanlega, skaltu nota vefvafra og fara á *mytobiidynavox.com* > Snap > notkunargögn.

Endurstilla notkunartalningu (í notandastillingum)



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Gagnarakning** flokkur.
4. Veldu **Stjórna gögnum**.
5. Veldu svæðið sem þú vilt endurstilla hnappanotkunartalningu og sýningartalningu á núll.
6. Veldu **Endurstilla** til að endurstilla notkunar- og sýningartalningu fyrir valið svæði. Til að hætta við endurstillingaraðgerð velurðu hætta við.

Endurstilla notkunartalningu (í gegnum gagnarakningarhnappinn í efstu stiku)



Til að virkja gagnarakningar hnappinn í efstu stiku, sjá kafla Sýna hnappa á efstu stiku..



1. Veldu **Gagnarakning** hnappinn í efstu stiku.
2. Veldu **Stjórna gögnum**.
3. Veldu svæðið sem þú vilt endurstilla hnappanotkunartalningu og sýningartalningu á núll.
4. Veldu **Endurstilla** til að endurstilla notkunar- og sýningartalningu fyrir valið svæði. Til að hætta við endurstillingaraðgerð velurðu hætta við.

15 Kerfisstillingar

15.1 Kjörstillingar

15.1.1 Aðgangskóði

Þegar virkt þarf fjögurra stafa aðgangskóða til að fá aðgang að innkaupum í forriti og tilgreindum eiginleikum í efstu stikunni. Virkjun aðgangskóða getur hjálpað til við að koma í veg fyrir óheimilar breytingar á síðusetti og stillingum.

Virkja aðgangskóða



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Kerfi** flippann.
3. Veldu **Aðgangskóði**.
4. Stilltu nota aðgangskóðaröfann á **Kveikt**.
5. Settu inn fjögurra stafa aðgangskóða sem aðeins þú veist og er ekki auðvelt að giska á.

Búa til aðgangskóða

Settu inn aðgangskóða

—

—

—

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

✕

Hætta við

6. Settu inn aðgangskóðann aftur til að staðfesta hann.
7. Þegar þú kveikir á Nota aðgangskóða er aðgangskóði virkur fyrir innkaup í forriti, breytingastillingu, samstillingu, gagnarakningu, leitarstillingu, ljósaperu og stýrihnappa efstu stikunnar (Til baka, Heima og Mælaborðs) sjálfgefið. Stilltu hann á slökkt fyrir hvern sem er af þessum eiginleikum ef þú vilt að þeir séu aðgengilegir án aðgangskóða. Ef aðgangskóði er virkjaður og samstillingareiginleikaaðgangskóði er óvirkur mun samstillinga aðeins virka í sækja eingöngu ham. Þegar þú samstillir í sækja eingöngu ham færðu breytingar á síðusetti (sem gerðar eru á öðrum tækjum) en sendir engar breytingar á síðusettinu sem gerðar voru á núverandi tæki.
8. Þegar þú ferð út úr breytingastillingu verður aðgangskóði nauðsynlegur til að fá aðgang að innkaupum í forriti og fyrir hvaða eiginleika sem er kveikt á í valmynd aðgangskóða.



Ef þú hefur þegar virkjað aðgangskóða getur þú endurstíllt aðgangskóða með því að velja hnappinn.

Ef þú gleymir aðgangskóðanum skaltu nota master-aðgangskóða (0250) til að fá aðgang að breytingarham og setja inn nýjan aðgangskóða tafarlaust.



Breyta

15.1.2 Skjástillingar (aðeins fyrir Windows)

Þegar heilskjáhamur er virkjaður fyllir TD Snap® hugbúnaðurinn út í allan skjáinn á tækinu. Þegar heilskjáhamur er afvirkjaður fellist TD Snap® hugbúnaðurinn inn í sníðanlegan skjá á tækinu.

15.1.3 Breytingarstilling tungumáls

Veldu tungumál fyrir viðmót breytingarhams.

15.2 Tæki



Tækjahlutaeiginleikar eru aðeins tiltækir á Tobii Dynavox I-13, I-16 og TD Pilot tækjum.

15.2.1 Stillingar félagsluggavísir

Félagaglugginn er skjár aftan á Tobii Dynavox I-13, I-16 og TD tækjum eingöngu. Félagaglugginn upplýsir tjáskiptafélagann að notandi sé að undirbúa sig undir að tala og sýnir texta sem félaginn les.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Kerfi** flipann.
3. Veldu **Tæki**.
4. Veldu úr valkostum félagslugga:
 - **Sýna skilaboðagluggatexta** — sýna skilaboðagluggatexta í félagslugga í rauntíma.
 - **Sýna texta sem verið er að tala** — sýna aðeins texta í félagslugga þegar hann er talaður. Á meðan verið er að semja í skilaboðaglugga sýnir félagslugginn röð punkta sem sýnir að notandi undirbýr skilaboð sín. Þegar skilaboðaglugginn er talaður skrunar félagslugginn textanum um leið og hann er talaður.Félagaglugginn sýnir bara texta. Hann sýnir ekki tákn.
5. Veldu í stöðu útlits félagslugga:
 - **Spegill** — sýnir minni útgáfu af félagslugganum í efstu stíku.
 - **Tákn** — sýna tákn þegar kveikt er á félagslugga. Fela tákn þegar slökkt er á félagslugga.
6. Setur straum félagslugga á **Kveikt** eða **Slökkt**. Þegar straumur félagslugga er stilltur á slökkt, sýnir hann ekki neinn texta.



Þú getur einnig notað aðgerðir hnapps til að stjórna birtustigi skjás félagslugga og kveikja og slökkva á félagslugga. Sjá kafla 9.6.2 *Virkt efni, síða 38* og 9.7 *Aðgerðir hnapps, síða 47*.

15.3 Búð

Kauptu hluti (iPadOS eingöngu) og stjórnaðu virkjunarlyklinum þínum.

Athugaðu: Ef þú ert að nota Windows tæki geturðu keypt með því að hringja í Tobii Dynavox stuðning <https://www.tobiidynavox.com/pages/locations>

15.3.1 Gerðu kaup (aðeins iPadOS)



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Kerfi** flipann.
3. Veldu **Búð**.
4. Veldu **Kaupa** á hlutum sem vilt kaupa.
5. Kláraðu öruggu viðskiptin þín.



Internettinging er nauðsynleg til að kaupa í búðinni.

15.3.2 Endurheimta innkaup (Aðeins Windows)

Ef keyptu hlutirnir þínir birtast ekki í Windows útgáfunni af TD Snap® forritinu, skaltu endurheimta kaupin með virkjunarlyklinum þínum.



Internettinging er nauðsynleg til að endurheimta innkaup.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Kerfi** flipann.
3. Veldu **Búð**.
4. Veldu **Endurheimta innkaup**.
5. Sláðu inn **Virkjunarlykilinn** þinn.
6. Veldu **Búið**.

15.3.3 Afvirkja lykil (Aðeins Windows)

Fjarlægðu virkjunarlykilinn þinn úr núverandi Windows tæki til þess að hægt sé að nota hann á öðru tæki.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Kerfi** flipann.
3. Veldu **Búð**.
4. Veldu **Afvirkja lykil**. Staðfestingargluggi mun opnast.
5. Staðfestu að þú viljir afvirkja lykilinn þinn á þessu tæki.

15.4 Táknasett

15.4.1 Leitarstillingar

Þegar örugg táknleit er virkjuð birtast berorð tákn ekki í táknleit, (táknmynduðum) skilaboðaglugga eða leitarham. Þegar örugg táknleit er óvirk, notar táknleit, skilaboðagluggatákn og leitarhamur öll tiltæk tákn.

15.4.2 Uppsett og niðurhalanleg tákn

Táknasettin sem talin eru upp í uppsett tákn hlutanum eru táknasett sem eru þegar uppsett og tiltæk á tækinu.

Til að eyða uppsettu táknasetti skaltu velja  **Eyða** hnappinn og velja síðan **Eyða** til að staðfesta.



Snap kjarnatáknum er ekki hægt að eyða.

Táknasettin sem talin eru upp í niðurhalanleg tákn hlutanum eru ókeypis táknasett sem eru ekki þegar uppsett á tækinu. Til að hlaða niður og setja upp táknasett skaltu velja **Niðurhal** við hliðina á viðeigandi táknasetti.



Þú verður að vera með virka nettengingu til að ná í táknasett.



Sum táknasett frá þriðja aðila má kaupa í gegnum verslunina. Sjá kafla 15.3 **Búð**, síða 122.

15.4.3 Endurraða táknasettum


Röð táknaleitarniðurstaðna er ákvörðuð af röð táknasetta í uppsettum táknalista. Ef þú notar, til dæmis, mest há-andstæðutákn í síðusetti þínu, gætir þú fært há-andstæðutáknasettið efst í lista yfir uppsett táknasett til að forgangsraða há-andstæðutáknum (þegar þau eru tiltæk) í táknleit.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Kerfi** flipann.
3. Veldu **Táknasett** flokkur.



4. Veldu og haltu niðri haldi táknasetts í lista yfir uppsett tákn.
5. Dragðu táknasettið í nýja staðsetningu á listanum.

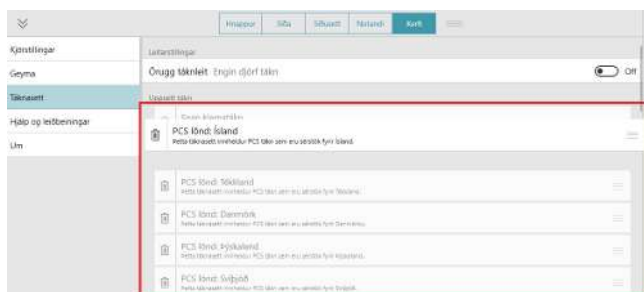

15.5 Hjálp og leiðbeiningar

15.5.1 Myndbönd

Horfðu á myndbönd til að læra meira um notkun TD Snap®.

15.5.2 Pathways fyrir Core First

	Pathways fyrir Core First er ókeypis forrit sem kennir þér öflugustu aðferðirnar við að nota TD Snap® Core First fyrir tjáskipti, læsi, hegðunarstuðning og fleira! Fylgdu tenglunum í þessum kafla til að læra meira.
---	--

15.5.3 Snögg yfirferð

Endurræstu snögga yfirferð til að læra að nota TD Snap® hugbúnaðinn.

15.5.4 Ytri hjálp

Fáðu aðgang að notandaleiðbeiningum, þjálfunarspjöldum, frekari myndböndum, þekkingargrunni á netinu og leyfissamningi endanlegs notanda.

15.6 Um

TD Snap® útgáfuupplýsingar.

15.6.1 Senda endurgjöf

Notaðu hnappinn fyrir senda endurgjöf til tilkynna vandamál í sambandi við TD Snap® eða senda ábendingu um eiginleikaósk til þróunarteymsins. Þetta er ekki rauntímaspjall eða tæknaðstoð.

15.6.2 Hugbúnaðaruppfærslur



Gildir eingöngu fyrir Windows

TD Snap® forritið framkvæmir reglulega sjálfvirkar uppfærslur.

Til að athuga handvirkt hvort ný útgáfa sé komin og hala niður uppfærslunni:



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Kerfi** flipann.
3. Veldu **Kjörstillingar** flokkinn.
4. Ef uppfærsla er fáanleg mun hún birtast fyrir neðan EAN númerið. Til að fá uppfærða útgáfu skal velja **Setja upp uppfærslu**.

Höfundarréttur © Dynavox Group AB (Publ). Ekki eru allar vörur og þjónustur fáanlegar á öllum mörkuðum. Tæknilýsingar geta breyst án fyrirvara. Öll vörumerki eru í eigu hlutaðeigandi eiganda.

Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækið þitt

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörinni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluaðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.