


Snap™ Core First®

Notandahandbók

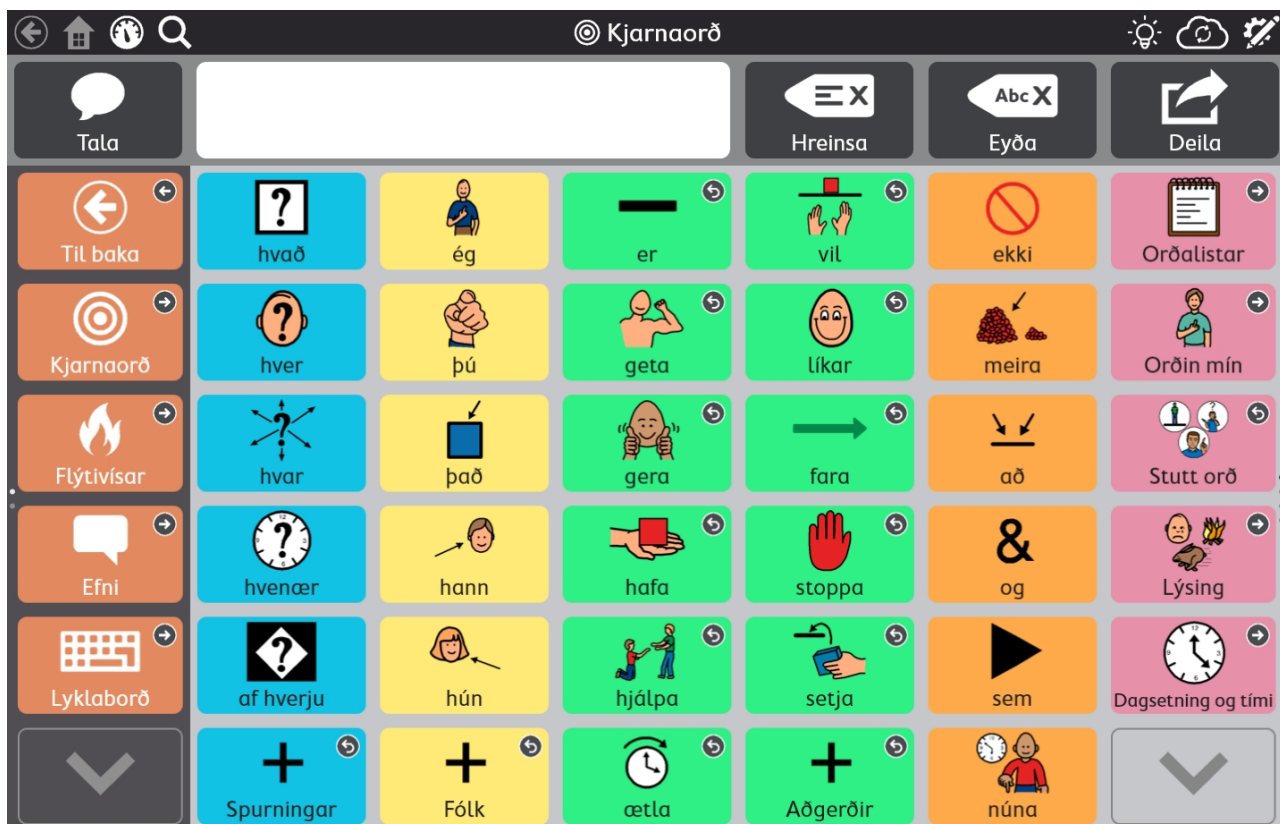

Notandahandbók Snap™ Core First®

Útgáfa 1.15

02/2021

Allur réttur áskilinn.

Copyright © Tobii AB (publ)

Ekki má afrita nokkurn hluta af þessu skjali, geyma það í endurheimtakerfi, eða senda í nokkru formi, með nokkrum leiðum (rafrænum, ljósritun, upptöku eða á annan hátt) án þess að vera með skriflegt leyfi frá útgefanda.

Höfundarréttarvernd nær yfir öll form og efni höfundarréttarvarinna efna og upplýsinga sem gildandi lög leyfa eða eiga eftir að leyfa, þ.m.t. án takmarka, efni sem kemur frá hugbúnaðinum sem sést á skjánum svo sem skjámyndir, valmyndir o.s.frv.

Upplýsingarnar í þessu skjali eru í eigu Tobii Dynavox. Hverskonar endurgerð að hluta eða í heilu lagi án fyrra skriflegs samþykkis Tobii Dynavox er óleyfileg.

Vörur sem er vísað til í þessu skjali geta verið annað hvort vörumerki og/eða skráð vörumerki viðkomandi eigenda. Útgefandi og höfundur gera ekki tilkall til þessara vörumerkja.

Þó að allrar varfærni hafi verið gætt við undirbúning þessa skjals, taka útgefandi og höfundur enga ábyrgð á villum eða yfirsjónum, eða á tjóni sem verður til af notkun upplýsinga í þessu skjali eða af notkun forrita eða forritunarkóða sem gæti fylgt með því. Útgefandi og höfundur bera enga skaðabótaskyldu vegna tapaðs hagnaðar, eða nokkurs annars viðskiptalegs taps sem orsakast af eða er talið hafa orsakast beint eða óbeint af þessu skjali.

Efni getur breyst án fyrirvara.

Athugaðu vefsíðu Tobii Dynavox

www.TobiiDynavox.com fyrir dagréttu útgáfur af þessu skjali.

Tengiliðaupplýsingar:

Tobii Dynavox AB
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Sweden

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778



Efnisyfirlit

1	Velkomin	8
1.1	Kerfiskröfur	8
1.2	Að fá Snap Core First	9
1.2.1	Kaupa taleiginleika	9
2	Kennsluleiðbeiningar og stuðningur	10
2.1	Tobii Dynavox Pathways fyrir Core First	10
2.2	Kennsluleiðbeiningar og stuðningur á vefnum	10
3	Að byrja	11
3.1	Setja upp nýjan notanda	11
3.2	Endurheimta núverandi notanda	11
3.3	Veldu síðuset	11
3.3.1	Core First	12
3.3.2	Textasíðuset	12
3.3.3	Core First skönnunarsíðuset	13
3.3.4	Aphasia síðuset	13
3.4	Veldu rúðustærð	14
4	Yfirlit	15
5	Efsta stika	16
5.1	Til baka	16
5.2	Heima	16
5.3	Stjórnborð	16
5.4	Leita	16
5.5	Félagsgluggavísir	17
5.6	Gagnarakning	18
5.7	Samstill	18
5.8	Breyta	18
6	Skilaboðaslá	19
6.1	Tala	19
6.2	Skilaboðagluggi	19
6.2.1	Breyta texta í skilaboðaglugga	19
6.3	Hreinsa	20
6.4	Eyða	20
6.5	Spjall	21
6.6	Afrita á hnapp	21
6.7	Deila	21
7	Core First verkfærastika	22
7.1	Til baka	22
7.2	Kjarnaorð	22
7.3	Flýtvísar	23
7.4	Efni	23
7.4.1	Efnisorð	23
7.4.2	Stuðningur	23
7.5	Lyklaborð	25
7.6	Stjórnborð	25
7.7	Orðaform	26
7.8	Studd leiðsögn	26


7.9	Núverandi Boardmaker athöfn.....	26
7.10	abc (aðeins þýska)	26
8	Breytingar	28
8.1	Breytingasvæði	28
8.2	Bæta við hnappi	28
8.3	Færa hnapp	29
8.4	Breyta stærð hnapps	29
8.5	Hnappabreytingaverkfæri	31
8.5.1	Afturkalla og endurgera	31
8.5.2	Afrita og líma hnapp	31
8.5.3	Velja alla hnappa	32
8.5.4	Velja marga hnappa	32
8.5.5	Renningsval	33
8.5.6	Fela/sýna hnapp	33
8.5.7	Eyða hnappi	34
8.5.8	Víkka / fella saman breytingaverkfæri nöfn	34
8.6	Hnappa efni	34
8.6.1	Merki hnapps	34
8.6.2	Virkt efni	35
8.6.3	Skilaboð hnapps	37
8.6.4	Hljóðmerki hnapps	37
8.6.5	Mynd hnapps	38
8.6.6	Hnappagerðir	39
8.7	Aðgerðir hnapps	40
8.7.1	Eyða aðgerð	43
8.7.2	Endurraða aðgerðum hnapps	44
8.7.3	Veftafla	44
8.7.4	AccessIT	45
8.7.5	Spila Boardmaker athafnir í Snap:	46
8.8	Hnappastíll	50
8.8.1	Bakgrunnur hnapps	50
8.8.2	Rammi hnapps	51
8.8.3	Merki hnapps	51
8.9	Tengja á síðu / búa til nýja síðu	53
8.9.1	Búðu til tengla hnapp í tómu hólfi	53
8.9.2	Búa til tengil þar sem hnappur er þegar til	53
8.9.3	Tengja á nýja síðu / búa til nýja síðu	53
8.9.4	Tengja á síðu sem er til	53
8.9.5	Tengja á nýtt afrit af síðu sem er til	54
8.9.6	Flytja inn og tengja á síðu	54
8.9.7	Heimsækja síðu	54
8.10	Búa til skilaboðaglugga á síðunni	56
8.11	Málareglur hnapps	56
8.12	Fjarstýringar	57
8.13	Breyta síðu	58
8.13.1	Nafn síðu	58
8.13.2	Tákn síðu	58
8.13.3	Málareglur síðu	59
8.13.4	Rúðustærð síðu	60
8.13.5	Bakgrunnslitur síðu	60

8.13.6	Sýna/fela skilaboðaslá.....	60
8.13.7	Eyða síðu.....	61
8.13.8	Flytja inn/út síður.....	61
8.14	Skannaðir hópar.....	61
8.14.1	Valkostir skannaðs hóps.....	63
8.15	Breyta skilaboðaslá.....	63
8.15.1	Færðu til og breyttu stærð hluta í skilaboðaslá.....	63
8.15.2	Bæta við hnöppum í skilaboðaslánna.....	63
8.15.3	Fjarlægja hnappa úr skilaboðaslá.....	64
8.15.4	Búa til skilaboðaglugga á síðunni.....	64
8.16	Breyta verkfærastiku.....	65
8.17	Sérstíðir litir.....	65
9	Stillingar síðusets.....	67
9.1	Síðusett.....	67
9.1.1	Veldu síðusett.....	67
9.1.2	Búa til nýtt síðusett.....	67
9.1.3	Endurnefna síðusett og breyta lýsingu.....	68
9.1.4	Eyða síðusetti.....	68
9.1.5	Stilla heimasíðu.....	68
9.1.6	Stilla inn lykllaborðssíðu.....	68
9.2	Rúðustærð.....	69
9.3	Stíll síðusets.....	69
9.3.1	Leturgerð merki hnappa síðusets.....	69
9.3.2	Stærð leturgerðar merki hnappa síðusets.....	69
9.3.3	Feitletruð merki hnappa síðusets.....	70
9.3.4	Uppsetning hnappa síðusets.....	70
9.3.5	Útlit tengla síðusets.....	70
9.3.6	Rúðujaðar síðusets.....	71
9.3.7	Sjálfvaldir bakgrunnslitir síðusets.....	71
9.3.8	Leturgerð skilaboðaglugga síðusets.....	71
9.3.9	Stærð leturgerðar skilaboðaglugga síðusets.....	71
9.3.10	Litur texta skilaboðaglugga síðusets.....	71
9.3.11	Bakgrunnslitur texta skilaboðaglugga síðusets.....	72
9.3.12	Auðkennislitur texta skilaboðaglugga síðusets.....	72
9.3.13	Bakgrunnslitur texta skilaboðaslár síðusets.....	72
9.4	Kjörstillingar síðusets.....	72
9.5	Aðlögunarhnappar.....	73
9.6	Um síðusett.....	73
9.6.1	Stillingar efnishönnuða síðusets.....	73
10	Prenta.....	75
11	Google aðstoð.....	77
11.1	Tengdu Google aðganginn þinn.....	77
11.2	Setja upp Google tækið þitt.....	77
11.3	Tungumálastuðningur Google Assistant.....	77
11.4	Tala við Google Assistant.....	78
12	Deila og vista.....	80
12.1	Notendur.....	80
12.1.1	Taka öryggisafrit af notanda.....	80
12.1.2	Endurheimta notanda.....	80

12.2	Síðusetting.....	80
12.2.1	Flytja inn síðusetting.....	80
12.2.2	Vista afrit af síðusetting.....	81
12.2.3	Deila afriti af síðusetting (í gegnum myTobiiDynavox).....	81
12.2.4	Samstillir síðusetting.....	82
12.3	Síðubúnt.....	84
12.3.1	Flytja út síðubúnt.....	84
12.3.2	Flytja inn síðubúnt.....	86
13	Notandastillingar.....	87
13.1	Breyta notanda.....	87
13.2	Búa til nýjan notanda.....	87
13.3	Taka öryggisafrit af notanda.....	87
13.4	Endurheimta notanda.....	88
13.5	Breyta/Endurnefna notanda.....	89
13.6	Eyða notanda.....	89
13.7	Innskráning á myTobiiDynavox reikning.....	90
13.8	Rödd.....	90
13.8.1	Talrödd.....	90
13.8.2	Raddtíðni.....	91
13.8.3	Undantekning í framburði.....	91
13.9	Úttakstæki tals.....	92
13.10	Tungumála-sértækar raddir.....	92
13.11	Google aðgangur.....	93
13.12	Kjörstillingar notanda.....	93
13.12.1	Talstillingar.....	93
13.12.2	Stillingar skilaboðaglugga.....	93
13.12.3	Spástillingar.....	94
13.12.4	Stillingar samstillingar.....	94
13.13	Aðgangsaðferð.....	94
13.13.1	Sjá aðgangsaðferð.....	95
13.13.2	Snerti valkostur.....	95
13.13.3	Halda við valkostur.....	96
13.13.4	Snerta út valkostur.....	97
13.13.5	Músadvöl valkostir.....	98
13.13.6	Gaze Interaction valkostir.....	99
13.13.7	Skönnunar valmöguleikar.....	100
13.14	Gagnarakning.....	103
13.14.1	Vöktun hnappanotkunar.....	103
13.14.2	Sýna hnappa á efstu stiku.....	104
13.14.3	Sýna hnappanotkunartalningu.....	104
13.14.4	Sýna sýningartalningu.....	105
13.14.5	Stjórna gögnum.....	105
14	Kerfisstillingar.....	107
14.1	Kjörstillingar.....	107
14.1.1	Aðgangskóði.....	107
14.1.2	Skjástillingar (aðeins fyrir Windows).....	107
14.1.3	Breytingarstilling tungumáls.....	107
14.2	Tæki.....	108
14.2.1	Stillingar félagsglugga.....	108
14.3	Búð.....	108

14.3.1	Innkaup.....	108
14.3.2	Endurheimta innkaup (Aðeins Windows).....	108
14.3.3	Afvirkja lykil (Aðeins Windows).....	109
14.4	Táknasett	109
14.4.1	Leitarstillingar	109
14.4.2	Uppsett og niðurhalanleg tákn.....	109
14.4.3	Endurraða táknasettum	109
14.5	Hjálp og leiðbeiningar	110
14.5.1	Myndbönd	110
14.5.2	Pathways fyrir Core First	110
14.5.3	Snögg yfirferð	110
14.5.4	Ytri hjálp.....	110
14.6	Um.....	110
14.6.1	Hugbúnaðaruppfærslur	110

1 Velkomin

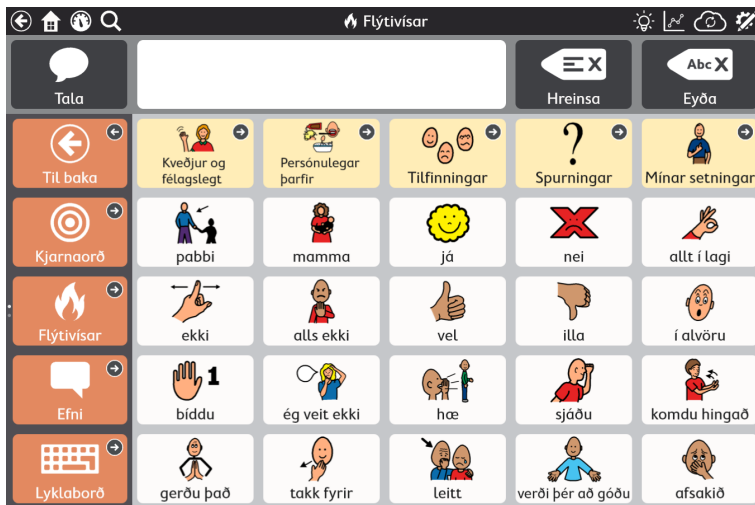

Skýringarmynd 1.1 Snap Core First — Flýtvísar

Tobii Dynavox Snap Core First er öflugur tjáskiptabúnaður sem byggir á táknum fyrir tjáskipti. Tjáskiptabúnaðurinn er hannaður til að vera auðveldur í notkun, gæddur innsæi og er lausn sem fánleg er á markaði bæði fyrir notanda og tjáskiptafélaga. Snap Core First er fullkomin lausn fyrir einstaklinga með einhverfu, lömun af völdum heilaskemmda, Downs-heilkenni og greindarskerðingu. Með Snap veitum við bestu mögulegu tjáskiptareynsluna byggða á táknum ásamt nauðsynlegum þáttum fyrir foreldra, kennara eða meðferðaraðila til að vinna með notendum til að hjálpa þeim til árangursríkra tjáskipta, læra tungumál og ná færni í læsi. Nálgun okkar nær yfir hinar þrjár meginstoðir tjáskiptarángurs: Vöxtur, þátttaka og læsi.

Snap Core First er ekki bara enn eini TST tjáskiptahugbúnaðurinn, heldur yfirgripsmikið forrit til að færa fólk í átt að læsi og byltingarkenndu sjálfstæði, sama hver upphafspunkturinn er. Í kjarna Snap er Core First, síðusett sem hverfast um kerfisbundna uppbyggingu Tobii Dynavox á kjarnaorðaforða, efni, hegðunarstuðningi, orðalistum og lyklaborði. Core First sem á rætur að rekja til rannsókna Háskóla Norður-Carolina Chapel Hill, nýtir sér hreyfiminni með því að kynna til sögunnar nýjan orðaforða kerfisbundið og með tilgangi, sem gerir notanda kleift að skala upp eða niður og vita alltaf hvar hægt er að finna orðaforða. Þessir eiginleikar leyfa notanda að læra tjáskiptatækni hvar sem þeir eru staddir og stuðlar að sífelldri þróun í átt að læsi og sjálfstæði.

1.1 Kerfiskröfur

Tafla 1.1 Windows stýrikerfi

	Stjórnkerfi	Arkitektúr	Minni	Snerting	Myndavél
Lágmarks	Windows 10 útgáfa 1803	x86	2 GB	Ekki nauðsynlegt	Ekki nauðsynlegt
Ráðlagt	Windows 10 útgáfa 20H2	x86	4 GB	Samþætt snerting	Samþætt myndavél

Tafla 1.2 iOS

	Stjórnkerfi	Tæki	Minni	Snerting	Myndavél
Lágmarks	iOS 10	iPad Air 2 iPad Mini 4	2 GB	Samþætt snerting	Ekki nauðsynlegt
Ráðlagt	iOS 14	iPad 8nda kynslóð	4 GB	Samþætt snerting	Samþætt myndavél

1.2 Að fá Snap Core First

Snap Core First er tiltækt í gegnum TobiiDynavox.com fyrir Windows tæki og Apple App Store fyrir iOS. Veldu Snap Core First Full til að fá alla eiginleika Snap Core First strax. Með Snap Core First Free, eru allir eiginleikar án tals tiltækir ókeypis, þ.m.t. Core First efnið, búa til og breyta síðum, búa til notanda og afrita, endurheimta og samstillta; hinsvegar er talvirkni takmörkuð. Heildar talvirkni er tiltæk sem kaup í forriti.

Talvirkni sem er óvirk í ókeypis útgáfu forritsins

- Tala skilaboðaglugga
- Hverskonar tal eða upptökuúttak sem kemur frá hnappavirkni
- Hverskonar tal eða upptökuúttak sem kemur frá hegðunarstuðningi
- Hljóðmerki

Talvirkni sem er tiltækt í ókeypis útgáfu forritsins

- Hljóðupptaka (í breytingarham)
- Forskoðun hljóðupptöku (í breytingarham)
- Raddforskoðun
- Forskoðun undantekningar í framburði (í breytingarham)

1.2.1 Kaupa taleiginleika

Aflæstu taleiginleikum Snap Core First hratt og örugglega í gegnum eins skiptis kaupa í forriti.

1. Ræsa Snap Core First.
2. Veldu afvirkja tal hnappinn í efstu stikunni.
3. Veldu **kaupa**.
4. Kláraðu öruggu viðskiptin þín.



2 Kennsluleiðbeiningar og stuðningur

Tobii Dynavox býður upp á þó nokkuð af ókeypis kennsluleiðbeiningum til að styðja og bæta við reynslu þína af Snap Core First. Ekki missa af þessum verkfærum sem munu hjálpa þér að fá sem mest út úr Tobii Dynavox hugbúnaðinum þínum!

2.1 Tobii Dynavox Pathways fyrir Core First



Pathways fyrir Core First eru ókeypis kennsluleiðbeiningar sem hjálpar þér að innleiða Tobii Dynavox vörur á áhrifaríkasta og skilvirkasta hátt. Þú lærir á þetta rannsóknadrifna tæki sem hámarkar þátttöku, auðveldar notkun og margt fleira.

Pathways fyrir Core First leiðir þig áfram þegar þú byrjar að nota Snap Core First og hvetur til vaxtar í þátttöku, tungumáli og læsi. Pathways fyrir Core First mun:

- gefa skýra, sérsníðna leið til að byrja.
- hvetja til vaxtar einstaklinga á hvaða aldri og kunnáttustigi sem er.
- kenna þér að byggja upp kunnáttu á ýmsum sviðum, þ.m.t. notkun á kjarnaorðum, bæta við orðaforðann, nota Snap Core First við daglegar athafnir og fleira.
- sýna þér hvernig Snap Core First getur hjálpað til við félagslega hæfni og aðstæður, svo sem hvernig á að meðhöndla áföll í tjáskiptum, lóðsun og notkunarkunnáttu og hvetja til jákvæðrar hegðunar.
- byggja upp kunnáttu tjáskiptafélaga með helstu ábendingum.
- Styðja yfirstandandi sérsnið á Core First.

Heildarútgáfa eiginleika Pathways fyrir Core First er tiltæk sem ókeypis forrit fyrir Windows og iOS. Pathways fyrir Core First Lite er tiltæk á netinu í gegnum netvafra þinn. Heimsæktu www.tobiidynavox.com/learn/pathways fyrir frekari upplýsingar.

2.2 Kennsluleiðbeiningar og stuðningur á vefnum

myTobiiDynavox er persónuleg geymsluvefsíða þín og deiligátt. Hladdu upp notanda öryggisafritaskrá þína til myTobiiDynavox til varðveislu og til að deila með öllu tjáskiptastuðningsteymi þínu.

Farðu á myTobiiDynavox.com til að skrá þig fyrir ókeypis reikningi.

mytobiidynavox

Farðu á tobiidynavox.com/support-training/ fyrir hjálp, þjálfun og aðrar kennsluleiðbeiningar, þ.m.t.:

- svör við algengum spurningum
- þjálfunarmyndbönd
- niðurrhöl
- myndbandsupptökur af vefnámskeiðum
- rauntíma stuðningur

3 Að byrja

Þegar þú ræsir Snap Core First í fyrsta skipti verður þú spurð/ur nokkurra spurninga til að hjálpa til við að sérsníða hugbúnaðinn að þínum þörfum. Þú getur breytt þessum stillingum síðar ef þú vilt.

3.1 Setja upp nýjan notanda

Veldu **Byrja** og við verðum búin að setja forritið upp á minna en mínútu!



3.2 Endurheimta núverandi notanda

Notaðu þennan valkost ef þú ert þegar með öryggisafritsskrá fyrir notanda sem þú vilt endurheimta.

Endurheimta notandaöryggisafrit frá myTobiiDynavox

1. Veldu **Endurheimta núverandi notanda**.
2. Ef þú ert ekki skráð/ur inn á myTobiiDynavox, settu inn netfangið þitt og aðgangsorð og veldu síðan  **Næst**.
3. Veldu notandaöryggisafritaskrá úr listanum og veldu síðan  **Næst**.

Endurheimta notandaöryggisafrit frá staðbundinni skrá

1. Veldu **Endurheimta núverandi notanda**.
2. Veldu **Endurheimta frá staðbundinni skrá**.
3. Vafraðu og veldu notandaöryggisafritaskrá og veldu síðan **Opna**.

3.3 Veldu síðuset

Uppsett forrit sýnir sjálfvirktt síðuset sem passa við tungumálastillingar tækisins, ef það er tiltækt í Snap. Veldu **Breyttu um tungumál** til að sjá síðuset sem eru tiltæk á öðrum tungumálum.


- Kínverska (einfölduð)
- Tékkneska (CZ)
- Danska (DK)
- Hollenska (NL)
- Enska (AU)
- Enska (UK)
- Enska (UK)
- Enska (US)
- Franska (CA)
- Franska (FR)
- Þýska (DE)
- Þýska (Sviss)
- Íslenska (IS)
- Ítalska (IT)
- Japanska (JP)
- Norska (NO)
- Portúgalska (BR)
- Portúgalska (PT)
- Spænska (ES)
- Spænska (Rómanska Ameríka)
- Spænska (US)
- Sænska (SE)
- Frekari tungumál koma bráðlega!



Öll síðusettin sem eru innifalin í Snap Core First má sjá þegar settur er upp nýr notandi og í síðusettisflipanum. PODD og Gateway síðusettin eru fáanleg til kaups í búðinni. Sjá hluta 14.3 Búð.

3.3.1 Core First

Core First er aðalsíðusettið sem er tiltækt í Snap-hugbúnaðinum. Það er hannað til að hámarka þátttöku, læsi og vöxt í gegnum hin ýmsu tjáskiptaverkfæri sem eru notuð saman á sveigjanlegan og fyrirsjáanlegan hátt.

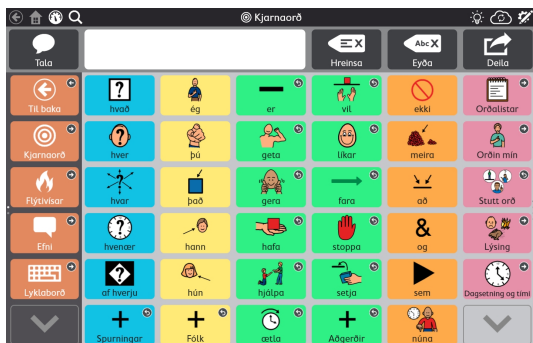

Skýringarmynd 3.1 Core First síðuset

Aðalsmerki Core First er kjarnaorðatækni. Rannsóknir, klínísk upplifun og notendaprófanir voru notaðar til að finna:

- Orðaval fyrir hámarksnotkun á mörgum sviðum.
- Orðastaðsetning og notandaviðmót
- Röðun orðainnleiðingar.
- Stöðug staðsetning orða á meðan öðrum er kerfisbundið bætt við.
- Skilvirkni leiðsagnar.
- Stuðningur til að kenna notendum merkingu orða og hvernig á að sameina þau til að búa til einkvæm skilaboð.

Frekari tjáskiptaverkfæri innifalin í Core First eru meðal annars:

- Flytvisar — hröð, fyrirsjáanleg skilaboð sem hægt er nota ein eða með öðrum orðum.
- Lyklaborð — settu stafi inn í skilaboðagluggann til að búa til eða breyta orðum.
- Orðalisti — skipulagðir eftir flokkum svo auðvelt er að finna þá.
- Efni — styður tjáskipti í sérstökum aðstæðum eða í kringum ákveðið efni.
- Stuðningur — hjálpar notendum með hegðun og félagsleg tjáskipti.
- Stjórnborð — fjarstýringar, hljóðstyrksstýring og fleira innan seilingar!

Core First síðusettið er hannað til að vera fyrirmynd í tjáskiptum með hjálp (TST) efni, sem gefur notendum aðgengilegustu upplifunina við að finna efni hratt og hafa hámarks getu til að búa til einstök og sérstök skilaboð. Core First gerir notendum kleift að taka þátt í hröðum, rauntímatjáskiptum um efni sem eru þeim mikilvægust. Það gefur þeim kost á að búa til ný skilaboð sem væri erfitt að spá fyrir um fyrirfram. Með því að fara í gegnum verkfærin sem eru til staðar, geta tjáskiptatækni notendur verið virkir þátttakendur í aðstæðum og átt í tjáskiptum við tjáskiptafélaga sína.

Þróun læsis er mikilvæg hæfni sem þarf að vera hluti af tjáskiptalausninni. Með notkun lyklaborða, auðveldra tengla við rannsóknarprófuð forrit á tækinu og efni sem hannað er til að styðja við tjáskipti í kringum lestrarupplifun styður Core First læsisþróun fyrir alla notendur sína.

Að lokum er Core First ekki ætlað sem ein-stærð-hentar-öllum eða skorðað kerfi. Samfeldni yfir rúðustærðir er helsta leiðarstefið. Um leið og kunnátta notenda vex er hægt er að bæta við frekari valkostum fyrir flóknara tungumál. Þessum nýju valkostum er bætt við Core First án vandkvæða og efnið helst á fyrirsjáanlegum stöðum.

3.3.2 Textasíðuset

Þetta síðuset er hannað fyrir notendur sem reiða sig ekki á tákn fyrir tjáskipti. Mælt er með þessu textasíðuseti fyrir notendur tjáskiptatækni með góða lestrar- og samsetningarkunnáttu.

Síðuset, rúðustærðir: 7x10

3.3.3 Core First skönnunarsíðuset

Í þessu síðusetti hefur Core First efnið verið endurhannað til að auka þægindi og skilvirkni með skönnunar aðgangsaðferðinni. Það felur í sér að skanna síður til að hjálpa notendum að venjast að nota skönnunar aðgangsaðferðina.

Síðuset, rúðustærðir: 3X4, 6x4, 7x6, 9x8

3.3.4 Aphasia síðuset

Aphasia textasíðusettið er hannað fyrir notendur með Aphasia. Eiginleikar sem fylgja eru veftafla, efnissíður með rúðum eða sjónrænum senu uppsetningarmöguleikum, dagatal, myndaalbúm og Google Assistant og Alexa síður. Táknin sem notuð eru í Aphasia síðusettinu eru viðeigandi fyrir fullorðna notendur.

Síðuset, rúðustærðir: 6X5, 4x3, 3x3


3.4 Veldu rúðustærð

Val á rúðustærð fer eftir þó nokkrum þáttum: valnákvæmni er mikilvægust, þar á eftir sjónrænar og athyglisakmarkanir. Ef það eru vandamál við hraða eða nákvæmni valsins, skaltu byrja með færri rúður, þannig að notandi hafi stærri hnappa til að vinna með. Það er auðvelt að breyta rúðustærð í síðusettsstillingum, þannig ekki hafa áhyggjur af að finna rétta rúðustærð í fyrstu tilraun. Þú getur stækkað eða minnkað rúðustærð miðað við breytilega tungumála- eða líkamlega getu.



Ef þú vilt sýna skilaboðaslánna og/eða verkfærastiku verður þú að velja rúðustærð með að minnsta kosti 3 raðir og 3 dálka.


Tafla 3.1 Dæmi um rúðustærðir (ekki ítarlegt)

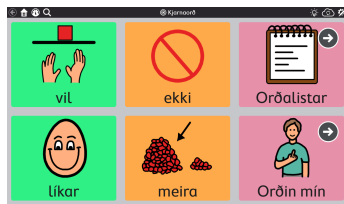

2x3




3x4

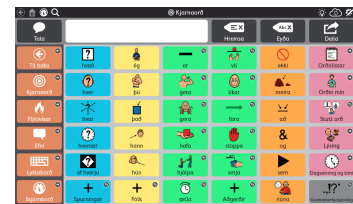

6x6

4 Yfirlit

Það er margt að uppgötva í Core First síðusettingu! Lestu áfram til að læra hvernig á að fara í gegnum efni í Snap og finna allt sem þú þarft til tjáskipta.

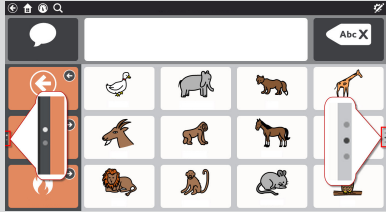Skruna	Þú getur skrunað upp og niður bæði á verkfærastikunni og síðunni. Síðustöðumerkin (punktar til vinstri á verkfærastikunni og hægra megin á síðunni) sýna þér þegar það er meira efni tiltækt fyrir ofan eða neðan.  Þú skrunar með því að renna yfir snertiskjáinn eða með því að velja yfirlitshnappinn, en það fer eftir stillingum þínum og aðgangsaðferð. Sjá hluta 13.13.2 <i>Snerti valkostur</i>.	
Efsta stika	Hnapparnir vinstra megin á efstu stikunni eru meðal annars til baka hnappur, heimahnappur, stjórnborðshnappur og leita hnappur. Sjá hluta 5 <i>Efsta stika</i>.	
Tenglahnappur	Tenglahnappar fara með þig á aðra síðu. Sjá hluta 8.9 <i>Tengja á síðu / búa til nýja síðu</i>.	
Heimsækja hnappur	Heimsækja hnappar fara með þig á aðra síðu, leyfa þér að velja eitt á síðunni og fara síðan með þig aftur á fyrri síðu sjálfvirk. Sjá hluta 8.9.7 <i>Heimsækja síðu</i>.	
Til baka hnappur	Til baka hnappurinn virkar eins og til baka hnappur á vefvafra. Veldu til baka hnappinn einu sinni til að fara til baka á fyrri síðu, eða oft til að halda áfram aftur í gegnum síðusögu.	
Boardmaker hnappur	Boardmaker hnapparnir tengjast möppum og athöfnum sem geymdar eru á Boardmaker Online. Skoðaðu og spilaðu athafnirnar hér í Snap! Sjá hluta 8.7.5 <i>Spila Boardmaker athafnir í Snap!</i>.	

5 Efsta stika

5.1 Til baka



Til baka hnappur fer með þig aftur á fyrri heimsóttu síðu.

5.2 Heima



Heimahnappur fer með þig á heimasíðu (fyrsta síðan sem þú sérð þegar þú ræsir Snap Core First). Heimahnappurinn er flýtleið sem þú getur notað til að fara til baka á heimasíðu þína hvaðan sem er úr hugbúnaðinum. Til að breyta heimasíðu þinni, sjá kafla 9.1.5 *Stilla heimasíðu*.

5.3 Stjórnborð



Notaðu stjórnborðshnappinn til að fá beinan aðgang að stjórnborðssíðu þinni. Stjórnborðssíðan er síða fyrir auðveldan aðgang að hnöppum sem eru notaðir oft, sérstaklega hnappar eins og hljóðstyrkur eða fjarstýringar.

5.4 Leita




Leit er aðeins tiltæk með snertiaðgangsaðferðinni.




Leitarverkfæri sýnir þér hvar þú finnur öll orð í Snap Core First. Settu einfaldlega inn leitarhugtak og fylgdu sjónrænu merkingunum. Sjónrænu merkingarnar leiða þig að markorði þannig að þú getir fundið orðið aftur seinna sjálfur.



1. Veldu **Leita** verkfæri í efstu stiku.
2. Settu inn leitarhugtak.

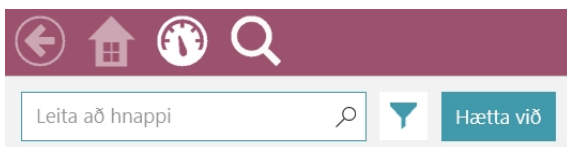



3. Ef á við, veldu **Síur** til að stilla þínar eigin síur:
 - **Leyfa tvöfaldar samsvaranir** — virkja að sýna staðsetningu allra hnappa sem eru eins.
 - **Sýna slóð falinna hnappa** — virkja að sýna faldar slóðir sem nota hnappa sem eru núna faldir.
4. Veldu hnappinn sem þú leitar að í leitarniðurstöðum.

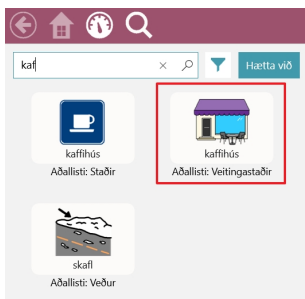

5. Veldu auðkennda hnappinn á hverri síðu þar til þú kemur að markhnappi.



Þú gætir þurft að skruna til að sjá næsta hnapp, þannig að þú skalt líta eftir örvum sem segja þér hvert þú átt að fara!

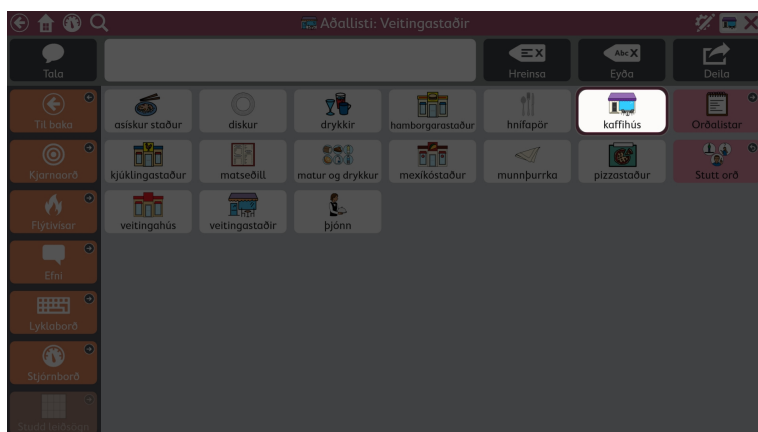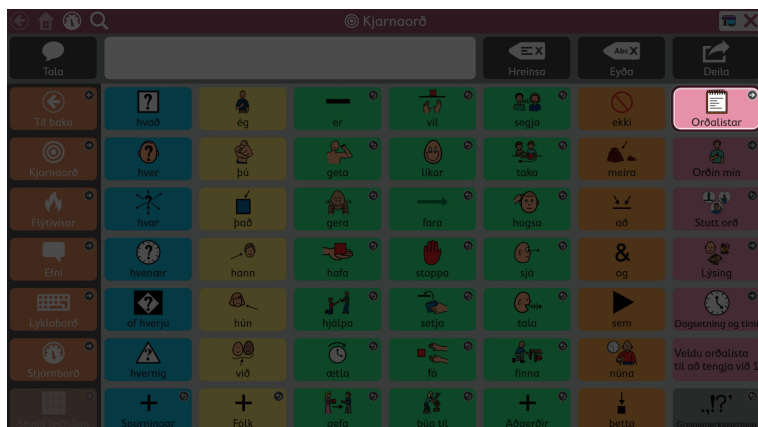

Taktu eftir hverjum auðkenndum hnappi þannig að þú munir leiðina sjálfur næst.

Þú getur hvenær sem er hætt við leitina með því að velja hvar sem er fyrir utan auðkenndu leiðina.

5.5 Félagsgluggavísir



Félagagluggavísir er aðeins tiltækur á Tobii Dynavox I-13 og I-16 tækjum.

Félagagluggavísir gefur þér upplýsingar um stöðu félagagluggans aftan á tækinu þínu.

Spegla útlit — sýnir textann sem er núna í félagaglugganum.



Tákna útlit — tákníð sýnir að kveikt sé á félagaglugga. Þegar slökkt er á félagaglugganum er tákníð ekki til staðar.



Til að breyta vísaútliti félagaglugga, sjá hluta 14.2.1 Stillingar félagsglugga.

5.6 Gagnarakning



Gagnarakning er aðeins aðgengileg með snertingu eða beinum músarsmelli.



Þegar hann er virkjaður, mun gagnarakningarhnappurinn gefa aðgang að eftirfarandi stillingum: Sýningarham, sýna hnappanotkunartalningu, sýna sýningartalningu og stjórna gögnum. Fyrir frekari upplýsingar um gagnarakningu, sjá [13.14 Gagnarakning](#).

5.7 Samstillla



Samstilling er aðeins aðgengileg með snertingu eða beinum músarsmelli.



Samstillingarhnappurinn er notaður til að deila síðusetti til samstillingar eða til að uppfæra síðusett sem er þegar deilt fyrir samstillingu. Fyrir frekari upplýsingar um samstillingu, sjá kafla [12.2.4 Samstillla síðusett](#).

Til að fela samstillingarhnappinn í notkunarham, sjá kafla [13.12.4 Stillingar samstillingar](#).

5.8 Breyta



Breyting er aðeins aðgengileg með snertingu eða beinum músarsmelli.



Veldu breyta hnappinn til að gera breytingar á síðusetti þínu og fara í stillingar.


Fyrir frekari upplýsingar, sjá kafla [8 Breytingar](#).

6 Skilaboðaslá

Skilaboðasláin sýnir samsettan skilaboðatexta og hnappanna til að deila því með heiminum!



Ef þú vilt sýna skilaboðaslánna verður þú að velja rúðustærð með að minnsta kosti 3 raðir og 3 dálka.

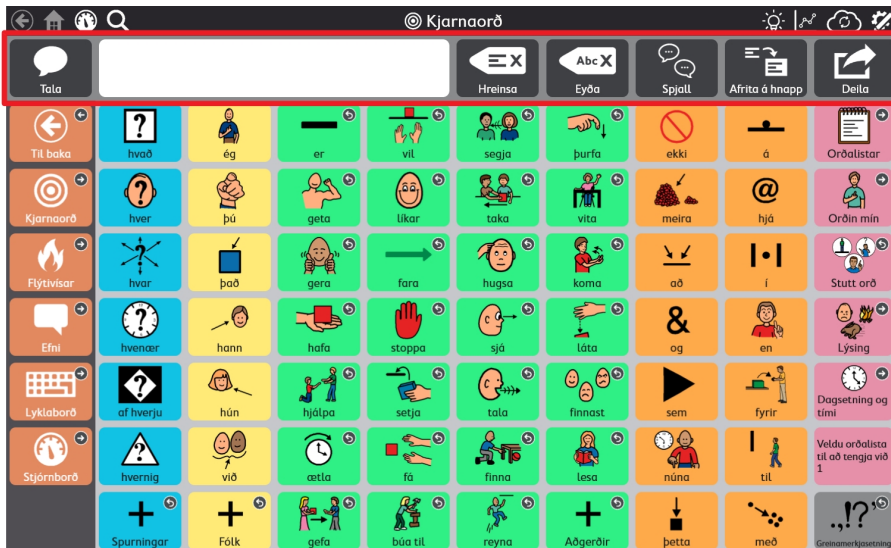

Til að breyta skilaboðaslá, sá 8.15 Breyta skilaboðaslá.

6.1 Tala



Veldu þennan hnapp til að tala núverandi efni skilaboðagluggans.

6.2 Skilaboðagluggi



Skilaboðaglugginn sýnir textann sem þú vilt tala eða senda sem skilaboð. Hann getur líka sýnt tákn. Þú getur sent skilaboð í skilaboðagluggann frá hnappi, skrifað beint inn í skilaboðagluggann með því að nota lykklaborðssíðuna eða límt texta úr kerfisklippiborðinu.

Fyrir stillingar skilaboðaglugga, sjá kafla 13.12.2 Stillingar skilaboðaglugga, síða 93.

6.2.1 Breyta texta í skilaboðaglugga.

Þegar texti er færður inn í skilaboðagluggann birtist bendillinn við enda textans sjálfkrafa. Til að færa bendilinn inni í skilaboðaglugganum, notið hnappa forritaða með *Færa bendil* aðgerðinni.

Færa bendil í skilaboðaglugga

- Notið *Færa bendil* aðgerðina til að færa bendilinn á eftirfarandi máta:

- Færa upp eða niður
- Færa áfram eða til baka um staf
- Færa áfram eða til baka um orð
- Færa áfram eða til baka um setningu
- Færa að byrjun eða enda línunnar
- Færa að byrjun eða enda texta skilaboðagluggans
- Færa upp eða niður textasíðu

Til að velja texta, notið hnappa forritaða með *Velja texta* aðgerðinni. Völdum texta í skilaboðaglugga er hægt er að eyða, breyta í feitlettrað eða skáletrað, klippa eða afrita, deila yfir í annað forrit, tala og margt fleira. Skoðið skilaboðagluggahlutann í 8.7 *Aðgerðir hnapps* til að læra meira um þessar aðgerðir.

Veldu texta í skilaboðaglugga

- Notið *Valinn texti* aðgerðina til að velja texta, færa textann, eða stækka valið á eftirfarandi máta:
 - Færa valið upp eða niður
 - Færa valið áfram eða til baka um staf
 - Færa valið áfram eða til baka um orð
 - Færa valið áfram eða til baka um setningu
 - Lengja valið að byrjun eða enda línunnar
 - Lengja valið að byrjun eða enda texta skilaboðagluggans
 - Lengja valið upp eða niður textasíðu
 - Lengja valið upp eða niður
 - Lengja valið áfram eða til baka um staf
 - Lengja valið áfram eða til baka um orð
 - Lengja valið áfram eða til baka um setningu
 - Velja allt
 - Hætta við val



Auðveldasta leiðin til að byrja að breyta texta í skilaboðaglugganum er að nota fyrirfram forritaða skilaboðaglugga breytingarsíðurnar. Þessar síður fylgja með Core First á ensku (US og UK) og textasíðusettnum. Skilaboðaglugga breytingarsíðurnar eru einnig fáanlegar í miðstöð síðusetta www.mytobiidynavox.com/pagesetcentral Fleiri tungumál koma fljótlega!

6.3 Hreinsa



Fjarlægja allt efni úr skilaboðaglugganum.

6.4 Eyða



Eyða núverandi orði eða völdum texta úr skilaboðaglugganum.

6.5 Spjall



Kveikja og slökkva á spjalli. Þegar þú virkjar spjall er efni núverandi skilaboðaglugga settur í flýtiminni og síðan er glugginn hreinsaður. Á meðan þú ert í spjalli getur þú sett nýtt efni inn í skilaboðagluggann og talað. Þegar slökkt er á spjalli er efni skilaboðagluggans endurheimt úr minni þannig að þú getir haldið áfram þar sem þú varst áður.

6.6 Afrita á hnapp



Afritaðu textann í skilaboðaglugganum og bættu honum síðan við hnapp. Þetta er notandaaðgengileg leið til að breyta hnöppum á hraðferð!

6.7 Deila




Notaðu þennan handhæga, notendavæna eiginleika til að senda texta skilaboðagluggans yfir á AccessIT 3 tæki (8.7.4 AccessIT), hnapp á núverandi síðu (6.6 Afrita á hnapp), kerfisklippiborðið eða Google Assistant.

Veldu Annað-hnappinn til að senda skilaboðagluggatextann yfir á app að eigin vali (eins og Twitter, Facebook. o.s.frv.)



Valmyndin fyrir Annað-hnappinn er eingöngu fáanleg í gegnum Touch.

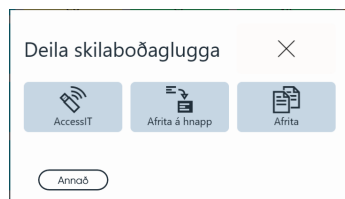


7 Core First verkfærastika

Til að læra hvernig þú breytir verkfærastikunni, sjá 8.16 *Breyta verkfærastiku*.




7.1 Til baka

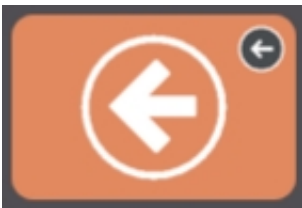

Skýringarmynd 7.1 Til baka hnappur — Core First verkfærastika

Til baka hnappurinn virkar eins og til baka hnappur í vafra. Notaðu hann til að fara til baka á síðustu síðu.

7.2 Kjarnaorð

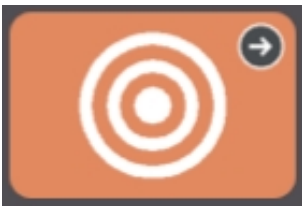

Skýringarmynd 7.2 Kjarnaorðhnappur — Core First verkfærastika

Þessi hnappur opnar kjarnaorðasíðuna. Aðalsmerki Core First er kjarnaorðatækni, sem var byggð á rannsóknum, klínískri reynslu og notendaprófunum. Helstu eiginleikar kjarnaorðasíðu eru meðal annars:

- Orðaval fyrir hámarksnotkun á mörgum sviðum.
- Orðastaðsetning.
- Röðun orðainnleiðingar.
- Stöðug staðsetning orða á meðan öðrum er kerfisbundið bætt við.
- Skilvirkni leiðsagnar.
- Stuðningur sem kennir notendum merkingu orða og hvernig á að sameina þau til að búa til einkvæm skilaboð.

7.3 Flýtivísar



Skýringarmynd 7.3 Flýtivísahnappur — Core First verkfærastika

Flýtivísar eru hröð, fyrirsjáanleg skilaboð sem hægt er nota ein eða í sameiningu. Þetta eru lítil orð til að halda samtalinu gangandi, ná athygli, eða gera athugasemdir. Einnig eru innifalin skilaboð sem eru oft notuð sem einbeita sér að persónulegum þörfum, kveðjum, félagslegum þáttum, tilfinningum, spurningum og viðgerðum. Flýtivísar tala strax og setja ekki texta inn í skilaboðagluggann.


7.4 Efni



Skýringarmynd 7.4 Efnishnappur — Core First verkfærastika


Efni styður tjáskipti í sérstökum aðstæðum eða í kringum sérstök þemu. Veldu efni úr efnissíðunni til að sjá viðeigandi orð og setningar. Sérsmíðu síðusettið með því að bæta við eigin efni!

7.4.1 Efnisorð

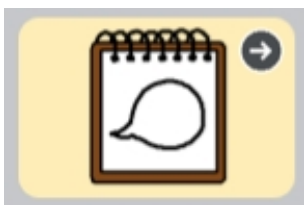


Þessar síður innihalda orð sem oft eru notuð í völdu efni.

7.4.2 Stuðningur

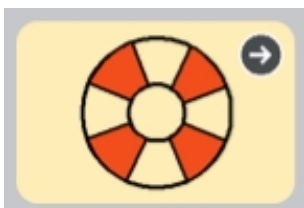

Stuðningur hjálpar notendum með hegðun og félagsleg tjáskipti.

7.4.2.1 Fyst, svo

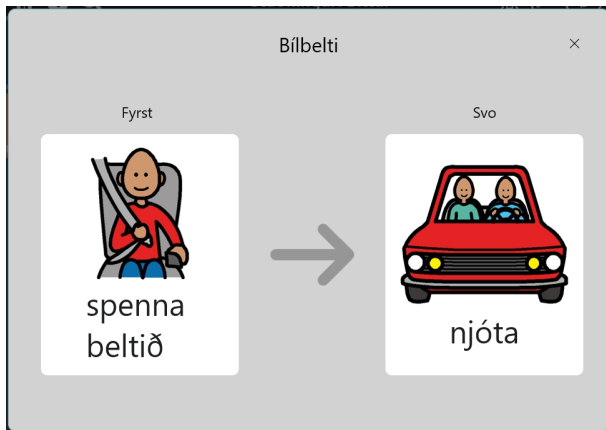

Skýringarmynd 7.5 Fyst, svo stuðningur

Þessi stuðningur sýnir tveggja skrefa röð atburða sem styrkir orsök og afleiðingu eða rökrétt skref.


7.4.2.2 Athafnaröð



Skýringarmynd 7.6 Stuðningur við athafnaröð

Þessi athafnaröð sýnir fjölskrefa röð atburða sem styrkir hugmyndina um orsök og afleiðingu eða röð rökréttra skrefa.

7.4.2.3 Lýsing

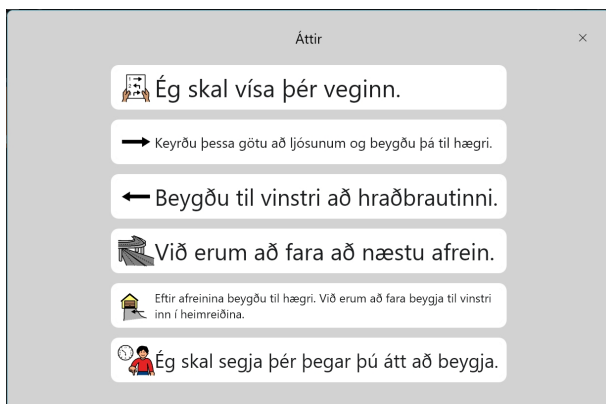

Skýringarmynd 7.7 Stuðningur við lýsingu

Lýsing gefur forgerðar setningar sem eru oft notaðar í kringum gefið efni. Lýsingar eru notaðar til að búa til félagshæfnisögur og hjálpa til að líkja eftir viðeigandi samtali.

7.4.2.4 Sjónrænn tímavaki



Skýringarmynd 7.8 Efsta stika með sjónrænum tímavaka

Sjónræni tímavakinn sýnir niðurtalsklukku og kvikaða litastiku í efstu stiku. Númeraskjárinn telur niður tiltekinn tíma og litastikan minnkar eftir því sem eftirstandandi tími minnkar. Þegar vekjaravalkosturinn er virkjaður heyrir hljóð þegar tíminn er búinn.

Til að hætta við sjónrænan tímavaka skaltu velja **X** hægra megin á efstu stikunni.



Til að breyta kjörstillingum niðurtalstíma eða vekjara, skaltu breyta hnappinum og velja sjónrænn tímavaki aðgerðina.

7.5 Lyklaborð



Skýringarmynd 7.9 Lyklaborðshnappur — Core First verkfærastika

Lyklaborðssiðan gefur hnappa fyrir staka stafi sem virka eins og lyklar á lyklaborði. Notaðu þessa síðu til að semja orð sem eru ekki tiltæk í síðusettingu þínu eða til að bæta við greinarmerkjum. Til að stilla inn ákjósanlega lyklaborðssiðu, sjá 9.1.6 *Stilla inn lyklaborðssiðu*.

7.6 Stjórnborð



Skýringarmynd 7.10 Stjórnborðshnappur — Core First verkfærastika

Stjórnborðssiðan er síða fyrir auðveldan aðgang að hnöppum sem eru notaðir oft, sérstaklega hnappar eins og hljóðstyrkur eða fjarstýringar.

7.7 Orðaform



Skýringarmynd 7.11 Orðaformahnappur — Core First verkfærastika

Orðaformasíðan sýnir mismunandi form (tíðir, númer o.s.frv.) síðasta orðs í skilaboðaglugganum. Veldu ákjósanlegt orðaform til að uppfæra orðið í skilaboðaglugganum.


7.8 Studd leiðsögn



Skýringarmynd 7.12 Studd leiðsögn — Core First verkfærastika

Studd leiðsögn síðan er heimasíða fyrir upphafsrúðustærð (<3x3). Studd leiðsögn hnappurinn í verkfærastikunni gerir síðuna tiltæka í öllum rúðustærðum.

7.9 Núverandi Boardmaker athöfn

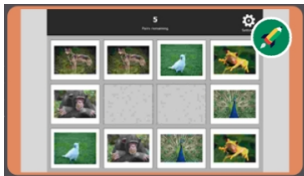

Skýringarmynd 7.13 Núverandi Boardmaker athöfn — Core First verkfærastika

Opnaðu Boardmaker athöfnina sem er í gangi, ef það á við. Ef það er engin Boardmaker athöfn í gangi er þessi hnappur óvirkur. Smámynd hnappsins og flípi uppfærir til að sýna framvindu Boardmaker athafnarinnar sem er í gangi.

7.10 abc (aðeins þýska)



Þessi hnappur opnar ABC orðaforðasvæðið sem er þekkt úr „LiterAACy“. Þar er að finna meira en 3.600 orð úr kjarna- og jaðarorðaforða, raðað eftir fyrsta og öðrum staf.

- ABC svæðið styður nám og notkun á læsiskunnáttu.
- Hljóðfræðisvar spilast þegar stafur er valinn.

- Það eru tvær útgáfur af þessum eiginleika, einn sem notar hástafi og annar með lágstafi. Lágstafa abc hnappurinn er sjálfvalinn. Til að nota hástafi skaltu gera (hástafa) ABC hnappinn í verkfærastikunni sjáanlegan og fela (lágstafa) abc hnappinn. Sjá hluta 8.5.6 *Fela/sýna hnapp*.

8 Breytingar

Til að breyta hnappi, síðu, stillingum, eða notendum þarf hugbúnaðurinn að vera í breytingaham. Hægt er að fara í breyt-

ingaham hvenær sem er með því að velja  **Breyta** hnappinn.




Breyta hnappurinn og breytingarhamur eru aðeins tiltækir með snertiaðgangsaðferðinni.

Á meðan þú ert í breytingaham getur þú tvísmellt á flesta síðuhnappa til að sjá hvernig þeir haga sér í notkunarham.


8.1 Breytingasvæði

breytingasvæði inniheldur öll verkfæri og flipa til að gera breytingar á síðusetti þínu og hugbúnaði.

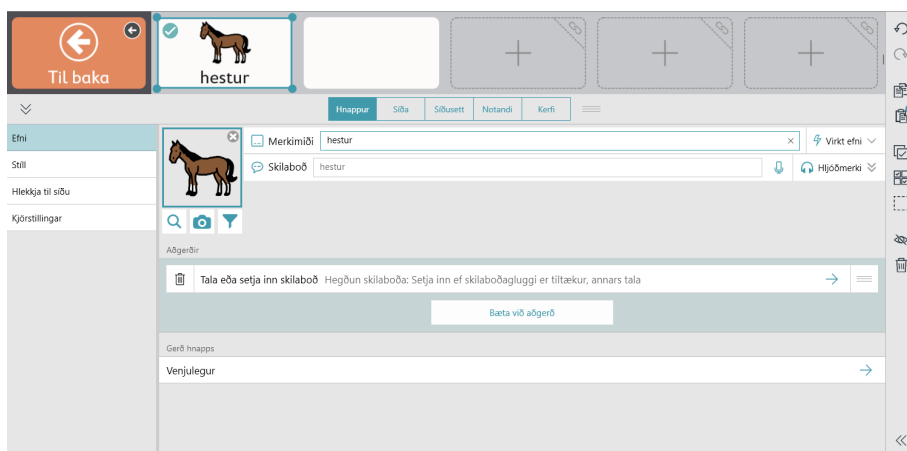

Skýringarmynd 8.1 breytingasvæði (sýndur stækkaður)

Veldu  til að stækka breytingagluggann.

Breyttu stærð breytingagluggans til að sérsníða stærðina með því að draga  upp eða niður á meðan svæðið er stækkað.

8.2 Bæta við hnappi

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Veldu  í tómu hólfi á síðunni til að búa til nýjan hnapp.



Skýringarmynd 8.2 Tómt hólfi


8.3 Færa hnapp



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu og haltu inni hnappinum sem þú vilt færa og dragðu hann síðan á ákjósanlegan stað. Það eru tvær leiðir til að setja hnapp á síðuna:
 - Skipta — Þegar þú dregur hnapp beint ofan á annan hnapp munu hnapparnir tveir skipta um stað á síðunni. Svarta útlínan í kringum valinn stað í rúðustærðunum sýnir skipti.



- Bæta inn í — Þegar þú dregur valinn hnapp á milli tveggja hnappa mun hnappurinn til hægri og neðan færast til að búa til pláss fyrir hnappinn. Hnapparnir munu halda sömu röð vinstri til hægri, ofan frá og niður á síðunni. Staðsetning hnapps sem er bætt inn í er sýnd á lóðréttu slánni.

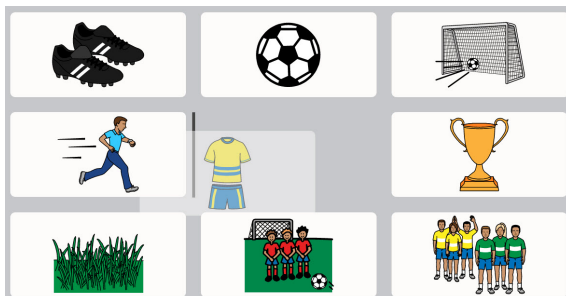

Þú getur sett inn hnapp lárétt (eins og sýnt er að ofan) eða lóðrétt.



Þegar þú færir hnapp á það aðeins við um núverandi rúðustærð.

8.4 Breyta stærð hnapps

Þú getur breytt stærð hnapps þannig að hann nái yfir jafn margar rúður innan síðu eða tækjastikunni og þú vilt.




1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp á síðunni eða tækjastikunni.




Aðeins er hægt að breyta stærð hnapps þegar einn hnappur er valinn.

3. Veldu og haltu niðri á einum af bláu punktunum í horninu á völdum hnappi og dragðu síðan til að breyta stærð hnappsins.

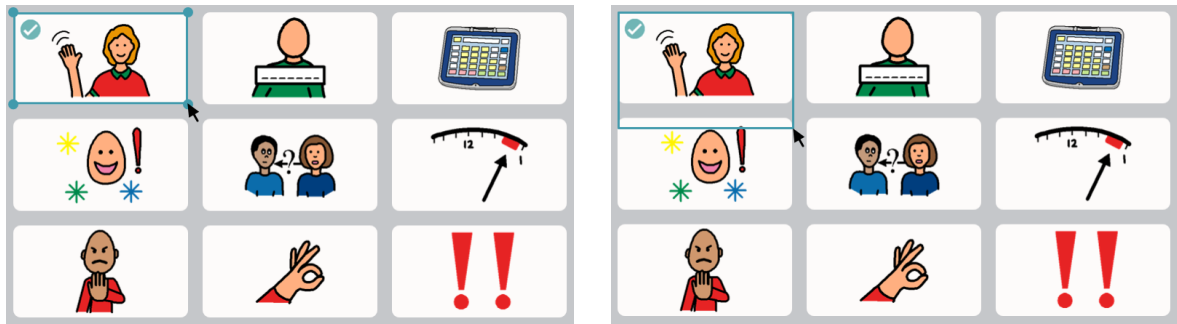

Hnappar sem er búið að breyta stærð á geta farið yfir heila síðu- eða tækjastíkuhluta.

4. Bíddu þangað til hnappurinn fyllir algjörlega út í rúðurnar og er kominn upp í æskilega stærð og slepptu síðan valinu.

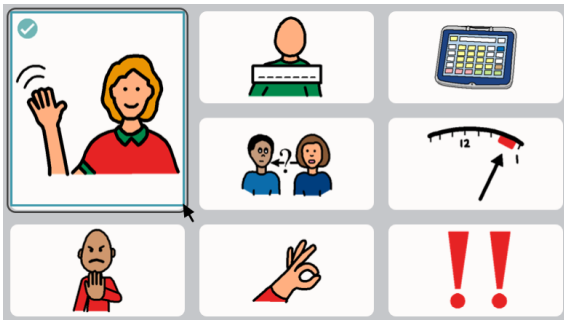

Ekki er hægt að breyta stærð hnapps eða færa hann yfir í hólf sem leiðsagnar (skrun) hnappurinn er í. Þegar þú stækkar hnapp mun hnappurinn sem er færður úr stað færast í næsta tóma hólf.



Þegar þú breytir stærð hnapps á það aðeins við um núverandi rúðustærð.

8.5 Hnappabreytingaverkfæri

Verkfærin sem er að finna hægra megin í forritaglugganum hjálpa þér að breyta hnöppum sem eru valdir núna.



Skýringarmynd 8.3 Hnappabreytingaverkfæri — (ofan frá og niður) afturkalla, endurgera, afrita, líma, velja allt, fjölval, renningsval, fela/sýna, eyða, víkka / draga saman nöfn verkfæra

8.5.1 Afturkalla og endurgera



Afturkalla verkfærið gerir þér kleift að afturkalla síðustu 100 breytingar sem gerðar voru á núverandi notanda/síðus-



etti. Endurgera verkfærið setur inn aftur síðustu breytingu sem þú afturkallaðir með afturkalla verkfærinu.



Afturkalla staflinn er endurstílltur þegar nýjum notanda, öðru síðusetti er hlaðið inn og þegar Snap hugbúnaðinum er lokað.

8.5.2 Afrita og líma hnapp



1. Veldu **Breyta** hnappinn.

2. Veldu hnapp.



3. Veldu **Afrita** verkfæri.

Taktu eftir að líma verkfærið sýnir fjölda hnappa sem þú hefur afritað.

4. Veldu  **Lima** verkfæri.
Hnappurinn mun límast á fyrsta tiltæka tóma hól á síðunni.

8.5.3 Velja alla hnappa

Velja allt verkfærið velur sjálfvirkt alla hnappa á núverandi síðu svo þú getir framkvæmt magnbreytingar aðgerðir.

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Hnappinn** flipann.
3. Veldu  **Velja allt** verkfæri.

 Eftir að þú velur allt getur þú smelt á einstaka hnappa til að afvelja þá; hinir hnapparnir verða áfram valdir.

4. Gerðu ákjósanlega breytingu á hnöppunum.
5. Til að afvelja alla hnappa, skaltu velja  **Fjölval** verkfæri.


8.5.4 Velja marga hnappa

 Fjölvals verkfærið gerir þér kleift að velja (handvirkt) marga hnappa í einu, þannig að þú getir framkvæmt breytingar á þeim öllum í einu.

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Hnappinn** flipann.
3. Veldu  **Fjölval** verkfæri.

 Fjölvalsverkfærið er svart þegar það er óvirkt og blátt þegar það er virkt.

4. Veldu hnappana sem þú vilt breyta á sama tíma.

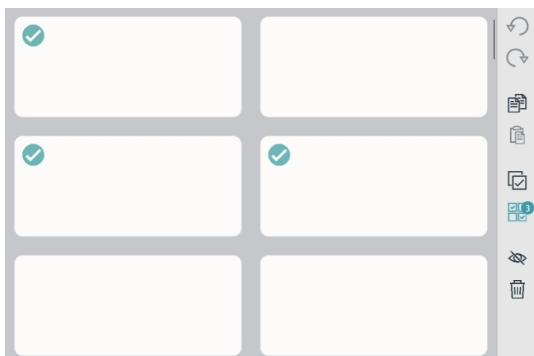


Skýringarmynd 8.4 Margir valdir hnappar — taktu eftir að fjölvalsverkfærið sýnir hversu margir hnappar eru valdir.

5. Gerðu ákjósanlega breytingu á hnöppunum.
6. Til að afvelja alla hnappa, skaltu velja  **Fjölval** verkfæri.

8.5.5 Renningsval

 Renningsvalsverkfærið er auðveld leið til að velja marga hnappa. Smelltu einfaldlega og dragðu til að teikna rétthyrning í kringum einn eða fleiri hnappa sem þú vilt velja.

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Hnappinn** flipann.
3. Veldu  **Renningsvals** verkfærið.
4. Smelltu á (eða snertu), og dragðu síðan skáhalt til að teikna rétthyrning yfir alla hnappana sem þú vilt velja.

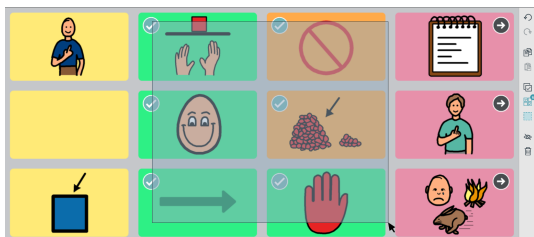

Skýringarmynd 8.5 Notkun Renningsvalsins — Hnappar þurfa ekki að vera algjörlega innan rétthyrningsins til að verða valdir.




Smelltu á staka hnappa hvern fyrir sig til að velja/afvelja þá.
Hnappaval er hægt að framkvæma á tækjastikunni eða á síðunni en ekki samtímis.

5. Gerðu þær breytingar sem þú óskar eftir á völdu hnöppunum.
6. Til að afvelja alla hnappa, skaltu velja  **Fjölval** verkfæri.

8.5.6 Fela/sýna hnapp

Hnappar sem eru faldir eru ekki sýnilegir í notkunarham. Hnappar sem eru tímabundið of erfiðir eða truflandi, til dæmis, má fela og sýna (af-fela) síðan seinna.

Í breytingaham eru faldir hnappar gefnir til kynna með gráu yfirlagi.

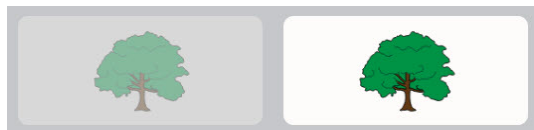

Skýringarmynd 8.6 Falinn hnappur við hlið sýnilegs hnapps eins og séð í breytingaham.

8.5.6.1 Fela

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp sem þú vilt fela.
3. Veldu  **Fela** verkfæri.



Sjálfvalin aðgerð fyrir fela/sýna verkfæri er að setja sýnileika á þann hnapp allstaðar þar sem hann birtist í síðusettinu. Til að stilla sýnileika aðeins fyrir valið tilvik af hnappinum skaltu smella og halda (ýta lengi) á fela/sýna verkfærið og velja **Breyta sýnileika hér**.

8.5.6.2 Sýna



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu falinn hnapp.



3. Veldu **Sýna** verkfæri.



Sjálfvalin aðgerð fyrir fela/sýna verkfæri er að setja sýnileika á þann hnapp allstaðar þar sem hann birtist í síðusettingu. Til að stilla sýnileika aðeins fyrir valið tilvik af hnappinum skaltu smella og halda (ýta lengi) á fela/sýna verkfærið og velja **Breyta sýnileika hér**.

8.5.7 Eyða hnappi



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.



3. Veldu **Eyða** verkfæri.

8.5.8 Víkka / fella saman breytingaverkfæri nöfn

Veldu << tvöföldu örvarnar til að sýna nöfn breytingaverkfæra. Veldu >> tvöföldu örvarnar til að fela nöfn verkfæra.

8.6 Hnappa efni



Skýringarmynd 8.7 Hnappur með merki, tákni, bakgrunnslit og meðalramma.

8.6.1 Merki hnapps


Hnappamerkið er textinn sem birtist á hnappinum.

8.6.1.1 Breyta merki hnapps



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.

3. Sláðu inn í **Merki** textareitinn.

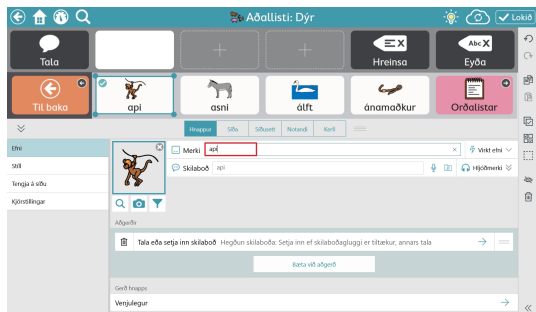

Skýringarmynd 8.8 Textareitur hnappamerki

Ef þú vilt breyta öðrum einkennum merkis (leturgerð, lit, staðsetningu, stærð o.s.frv.) sjá kafla 8.8.3 *Merki hnapps*.


8.6.2 Virkt efni

Virkt efni gerir þér kleift að sýna virkar upplýsingar á hnappi. Merki hnapps og tákn breytast til að endurspegla núverandi upplýsingastöðu.

8.6.2.1 Bæta virku efni við hnapp



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Virkt efni**. (Eingöngu fáanlegt ef **Hnappagerð** er stillt á **Venjuleg**)

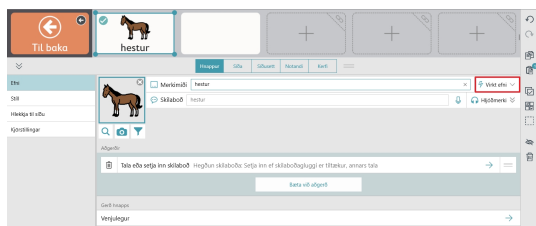

Skýringarmynd 8.9 Virkt efni

4. Veldu gerð virks efnis.

Gerð virks efnis

Lýsing

Ekkert

Veldu Ekkert til að fjarlægja Virkt efni af hnappinum.

Aðgangsaðferð hlé staða

Athugið: Hlé á aðgangsaðferð er aðeins tiltæk í eftirfarandi aðgangsaðferðum: Augnstýring, músadvöl. Þegar aðrar aðgangsaðferðir eru í notkun, eru hnappar sem nota aðgangsaðferð hlé staða virkt efni óvirkir.

Ef gera hlé á aðgangsaðferð aðgerð er til staðar á hnappinum (sjálfvalið), sýnir merkið aðgerðir hnappsins: Hefja aðgang eða gera hlé á aðgangi

Ef gera hlé á aðgangsaðferð aðgerð er ekki til staðar á hnappinum, sýnir merkið aðgerðir hnappsins: Aðgangur í keyrslu eða Hlé gert á aðgangi.

Aðgangstími

Athugið: Aðgangstími er ekki tiltækur fyrir snertiaðgangsaðferð.

Sýnir tímastillingargildið fyrir núgildandi aðgangsaðferð. Raunverulega tímastillingin fer eftir aðgangsaðferð t.d. biðtíma, skönnunarhraða, dvalartíma o.s.frv.

Fyrir frekari upplýsingar, sjá *Tafla 8.1 Aðgangstímagraf*, síða 43

Gerð virks efnis	Lýsing
Tengistaða AccessIT	Sýnir stöðu AccessIT 3 tæki tengingu: Aftengt, aftengi, tengi, eða tengt. Hægt er að tengja við AccessIT aðgerðina til að búa til hnapp sem sýnir stöðu og tengir við AccessIT tæki þegar hann er valinn.
Staða rafhlöðu	Sýnir prósentu núverandi rafhlöðu stöðu: 0–100%. Táknið breytist til að endurspegla stöðu rafhlöðunnar og sýna hvenær tækið er í sambandi og í hleðslu.
Spjallhamur	Ef víxla spjallham aðgerð er til staðar á hnappinum (sjálfvalið), sýnir merkið aðgerðir hnappsins: Spjalla eða stöðva spjall. Ef víxla spjallham aðgerð er ekki til staðar á hnappinum, sýnir merkið núverandi stöðu spjallhams: Spjallhamur á eða spjallhamur af.
Núverandi Boardmaker athöfn	Sýna titla og smámyndir af Boardmaker athöfn sem er í gangi (ef einhver). Hægt er að para við núverandi Boardmaker athöfnina til að búa til hnapp sem opnar á Boardmaker athöfnina sem er í gangi og sýnir einnig titil og smámynd athafnarinnar.
Dagsetning	Sýnir núverandi dag, mánuð og ár. Snið dagsetningar fer eftir staðsetningu.
Vikudagur	Sýnir núverandi vikudag.
Slökkt á hljóðsvörum staða	Ef víxlaðu hljóði af hljóðsvörum aðgerð er til staðar á hnappinum (sjálfvalið), sýnir merkið aðgerðir hnappsins: Taka hljóð af hljóðsvörum eða setja hljóð á hljóðsvörum. Ef víxlaðu hljóði af hljóðsvörum aðgerð er ekki til staðar á hnappinum, sýnir merki hnappsins núverandi stöðu hljóð af hljóðsvörum: Hljóð af hljóðsvörum eða hljóð á hljóðsvörum.
Hljóðstyrkur hljóðsvörunar	Sýnir styrk hljóðsvörunar. 0–100%. Má para við hækka hljóðsvörum aðgerð eða lækka hljóðsvörum aðgerð til að búa til hnapp sem stjórnar hljóðstyrk og sýnir líka hljóðstyrksstig hljóðsvörunar.
Birtustig félagsglugga	Aðeins Tobii Dynavox I-13 og I-16 tæki. Sýnir birtustig félagsglugga: 0–100%. Má para við hækka birtustig félagsglugga aðgerðina eða lækka birtustig félagsglugga til að búa til hnapp sem stjórnar birtustigi félagsglugga og sýnir einnig núverandi birtustig félagsglugga.
Félagaglugga straumstaða	Aðeins Tobii Dynavox I-13 og I-16 tæki. Ef víxla straum félagsglugga aðgerð er til staðar á hnappinum (sjálfvalið), sýnir merkið aðgerðir hnappsins: Kveikja á félagsglugga eða Slökkva á félagsglugga. Ef víxla straum félagsglugga er ekki til staðar á hnappinum, sýnir merkið núverandi stöðu félagsglugga: Kveikt á félagsglugga eða Slökkt á félagsglugga.
Talstaða	Ef tala skilaboðaglugga aðgerð er til staðar á hnappinum (sjálfvalið), sýnir merkið aðgerðir hnappsins: Tala eða stoppa. Ef tala skilaboðaglugga er ekki til staðar á hnappinum, sýnir merkið núverandi stöðu tals: Talandi eða ekki talandi.
Hljóð af talhamur	Ef víxlaðu hljóði af tali aðgerð er til staðar á hnappinum (sjálfvalið), sýnir merkið aðgerðir hnappsins: Hljóð af eða hljóð á. Ef víxlaðu hljóði af tali aðgerð er ekki til staðar á hnappinum, sýnir merki hnappsins núverandi stöðu hljóð af tali: Hljóð af eða hljóð á.
Hljóðstyrkur tals	Sýnir hljóðstyrk tals: 0–100%. Má para við hækka hljóðstyrk tals aðgerðina eða lækka hljóðstyrk tals aðgerðina til að búa til hnapp sem stjórnar hljóðstyrk og sýnir líka stig hljóðstyrks tals.
Tími	Sýnir núverandi kerfistíma í klukkustundum og mínútum. Tímasnið fer eftir svæðisstillingu stýrikerfis. Athugið: Táknið er almenn klukka sem breytist ekki með tímanum.


8.6.3 Skilaboð hnapps

Skilaboð hnapps geta verið texti, hljóð sem tekið var upp, eða hljóðskrá valin úr tækinu þínu. Þegar skilaboð hnapps er texti, er textinn textinn settur inn í skilaboðagluggann þegar hnappurinn er valinn. Ef skilaboðaglugginn er ekki til staðar er texti hnappskilaboðanna talaður. Hljóð sem eru tekin upp og hljóðskrár í hnappaskilaboðunum eru spiluð þegar hnappurinn er valinn.

8.6.3.1 Breyta texta hnappaskilaboðanna



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Sláðu inn í **Skilaboð** textareitinn.

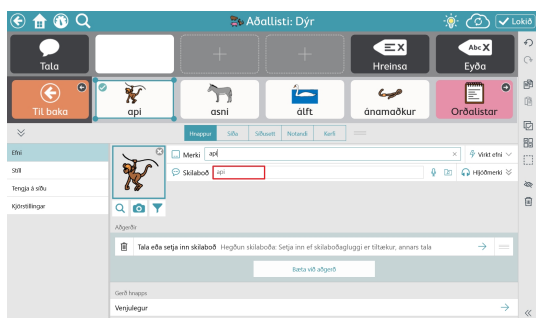

Skýringarmynd 8.10 Textareitur hnappskilaboða

8.6.3.2 Taka upp



1. Veldu **Taka upp** Taka upp skilaboð svar opnast.
2. Veldu **Taka upp** til að hefja upptöku.
3. Þegar þú hefur lokið upptökunni, veldu **Stöðva**.
4. Til að heyra upptökuna skaltu velja **Spila**.
5. Þegar þú hefur lokið við að búa til upptökuna, veldu **Vista** til að vista upptökuna. Veldu **Hætta við** til að loka Taka upp skilaboð svarinu án þess að vista

8.6.3.3 Bæta við hljóðskrá

Bættu við hljóðskrá til að búa til hnapp sem spilar lag eða aðra hljóðrás.



1. Veldu **Bæta við hljóðskrá**.
2. Vafraðu og veldu hljóðskrá á tækinu þínu. Skrár verða að vera <50MB.
Studdar hljóðskrár .aac, .m4a, .mp3, .wav, .wma
3. Veldu **Búið**.


8.6.4 Hljóðmerki hnapps

Hljóðmerkið má nota með snertiútgöngu, músadvöl, Gaze Interaction og skönnunar aðgangsaðferðum. Hljóðmerkið er forskoðun hnapps sem er talað þegar hnappurinn er auðkenndur en enn ekki búið að velja hann.

8.6.4.1 Breyta hljóðmerk hnapps



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Hljóðmerki** til að stækka röðina.

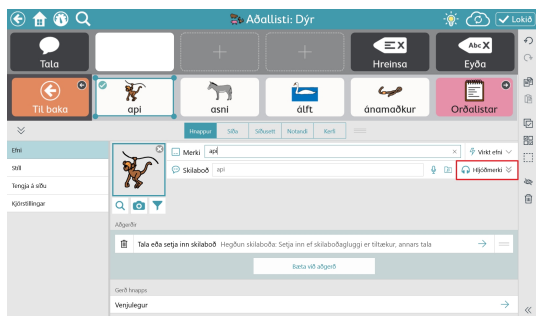

Skýringarmynd 8.11 Textareitur hljóðmerkis hnapps

4. Sláðu inn í **Hljóðmerki** textareitinn.

Ef þú vilt taka upp sérsníðið hljóðmerki, sjá kafla 8.6.3.2 *Taka upp*.


8.6.5 Mynd hnapps

Hnappur getur sýnt eitt tákni eða mynd.

8.6.5.1 Breyta mynd hnapps



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Bæta mynd við hnapp:
 - Til að leita að tákni:
 - a. Veldu **Táknaleit** hnappinn.Táknaleitarsvar opnast.

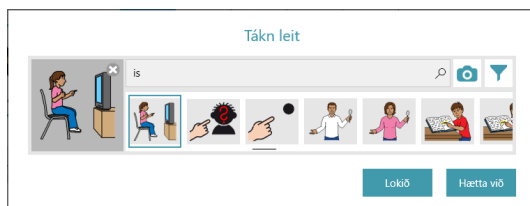


- b. Sláðu inn í textareitinn til að finnstilla leitaraskilmála.
 - c. Veldu viðeigandi tákni.
 - d. Veldu **Búið**.
- Til að nota myndavél til að taka mynd fyrir hnappamynd.
 - a. Veldu **Myndavél** hnappinn.
 - b. Veldu **Frá myndavél**.
 - c. Notaðu myndavélina á tækinu til að taka mynd.
 - Til að nota mynd sem geymd er á tækinu:

- a. Veldu **Myndavél** hnappinn.

- b. Veldu **Frá myndagagnasafni**.
- c. Notaðu skráavafrann til að fara að ákjósanlegri myndaskrá.

Ef þú vilt ekki hafa tákni á hnappnum skaltu velja **X** í horni núverandi tákns eða stilla uppsetningu hnappa á aðeins merki. Sjá hluta 8.8.3.5 *Uppsetning hnappa*.

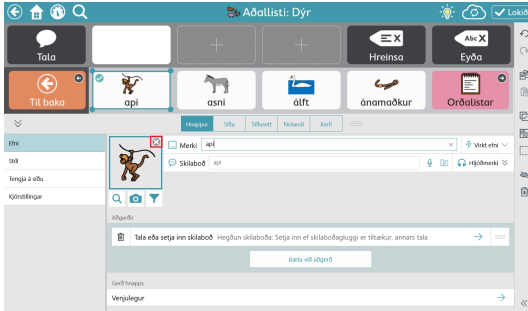

8.6.5.2 Sía tákneitarniðurstöður


1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu  **Tákna sía** hnappinn.
4. Veldu eiginleikana sem þú vilt sjá í tákneitarniðurstöðum þínum (fullorðinn, barn, kona, karl).

 Stúllingar þínar munu vera virkar þangað til þú breytir þeim aftur.

8.6.6 Hnappagerðir

Stilling hnappagerðar ákvarðar hvernig hnappurinn hegðar sér.

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Gerð hnapps**.
4. Veldu hnappa tegund úr listanum:
 - **Venjulegur** — getur verið með tákni, merki, skilaboð og aðgerðir. Sjálfvalin aðgerð er tala / setja inn skilaboð.
 - **Spá** — sér fyrir næsta orð miðað við núverandi samsetningu í skilaboðaglugganum. Veldu hnappinn til að setja inn núverandi sýnilegt orð í skilaboðaglugganum.
 - **Lyklaborð** — hnappar hannaðir til að setja inn stakan staf í skilaboðaglugga og/eða svara ákvæðum eins og shift-lykli eða hástafalás rétt. Lyklaborðshnappar geta einnig spilað hljóð sem tekið var upp eða hljóðskrá þegar þeir eru valdir. Sjá hluta 8.6.3.2 *Taka upp* og 8.6.3.3 *Bæta við hljóðskrá*.
 - **Beygingarhylkill** — breytir markorði í sérstakt orðform t.d. fleirtölu, þátíð o.s.frv. Markið er sett á einn tveggja valmöguleika: síðasta orðið í skilaboðaglugganum eða allir málfræðihnappar.

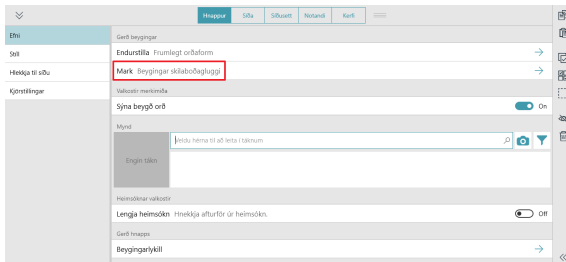

 Stillingar málareglu hnapps þurfa að vera nákvæmlega eins og fyrir beygingarhnappinn og málfræðihnappinn til að beygingin virki rétt.

- **Málfræði** — uppfærir sitt eigið merki til að spá fyrir um málfræðilega rétt form sem óskað er eftir miðað við innihald skilaboðagluggans
 - **Undanskilið efni** — (aðeins spænska) þegar fyllt er með viðeigandi fornafni er hægt að nota undanskilið efni hnappinn til að beygja málfræðihnappa og einnig setja merki sitt inn í skilaboðagluggann. Þegar hann er valinn einu sinni mun undanskilið efni hnappurinn beygja málfræðihnappa til að passa við fornafnið á hnappinum fyrir undanskilið efni. Ef hann er valinn aftur verður merkið (fornafnið) á hnappinum fyrir undanskilið efni sett í skilaboðagluggann.
- Ef tungumálareglur undirskilins efnis hnappsins eru stilltar á spænsku (Mexíkó, Spánn eða Bandaríkin) gæti eitt af eftirfarandi fornöfnum verið notað á hnappinn:

- yo
- tú
- usted
- él
- ella
- nosotros
- nosotras
- vosotros
- vosotras
- ustedes
- ellos
- ellas



Stillingar málareglur hnapps þurfa að vera nákvæmlega eins og fyrir undirskilið efni hnappinn og málfræðihnappinn til að beygingin virki rétt.

8.7 Aðgerðir hnapps

Aðgerðir leyfa þér að búa til hnappa sem gera hluti!

Bæta við eða breyta hnappa aðgerðum

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Bæta við aðgerð** til að velja aðgerð til að bæta við hnappinn. (Eingöngu fánlegt ef **Hnappagerð** er stillt á **Venjuleg**).



Sláðu inn í **Leita að aðgerðum** reitnum til að finna aðgerðir tengdar leitinni þinni. Fyrir frekari upplýsingar um

hvað aðgerðirnar gera, veldu  upplýsingartáknið í kaflaheitinu.



Uppáhalds aðgerðirnar birtast fyrst í aðgerðarlistanum til að auðvelda aðgang. Veldu  útlínustjörnunna til að

bæta aðgerðinni á uppáhalds listann. Veldu  heilu stjörnunna til að fjarlægja aðgerðina af uppáhalds listanum.

Aðgerðir fyrir tal	Lýsing
Tala skilaboðaglugga	Tala innihald skilaboðagluggans.
Tala eða setja inn skilaboð	Tala eða setja inn skilaboð hnapps
Tala setningu	Tala síðustu setningu í skilaboðaglugganum.
Stöðva allt hljóð	Stöðva allt tal og hljóð sem er nú í spilun eða í bið í Snap Core First.

Aðgerðir fyrir skilaboðaglugga	Lýsing
Feitletrað	Gera valinn texta í skilaboðaglugga feitletraðan
Hreinsa skilaboðaglugga	Hreinsa innihald skilaboðagluggans.
Afrita texta í skilaboðaglugga	Afrita núverandi texta skilaboðaglugga á kerfisklippiborðið.†
Afrita skilaboðaglugga á hnapp	Afrita núverandi texta skilaboðaglugga og bæta honum síðan við merki hnapps.†
Klippa texta í skilaboðaglugga	Klippa núverandi texta í skilaboðaglugga á kerfisklippiborðið.†
Eyða texta	Eyða völdum texta í skilaboðaglugga eða völdu orði í skilaboðaglugga.
Skáletrað	Gera valinn texta í skilaboðaglugga skáletraðan
Færa bendil	Færa bendil í skilaboðaglugga
Afrita klippiborð yfir á skilaboðaglugga	Líma innihald kerfisklippiborðsins á skilaboðagluggann.
Veldu texta	Veldu texta í skilaboðaglugga.
Deila texta í skilaboðaglugga	Deila texta í núverandi skilaboðaglugga.†
Víxla spjallham	Kveikja og slökkva á spjalli. Þegar spjall er virkjað er efni núverandi skilaboðaglugga sett í minni og síðan er glugginn hreinsaður. Á meðan þú ert í spjalli getur þú sett nýtt efni inn í skilaboðagluggann og talað. Þegar slökkt er á spjalli er efni skilaboðagluggans endurheimt úr minni þannig að þú getir haldið áfram þar sem þú varst áður.
Aðgerðir fyrir yfirlit	Lýsing
Hætta við heimsókn	Hættir við heimsókn þannig að þú sért áfram á núverandi síðu.
Lengja heimsókn	Hnappur sem inniheldur þessa aðgerð virkjar ekki endursendingu á síðustu síðu á meðan heimsókn er í gangi.
Fara til baka	Fara til baka á síðustu síðu
Fara heim	Fara á heimasíðu.
Tengill	Tengja á aðra síðu.
Opna stjórnborð	Opna stjórnborðssíðu.
Opna lyklaborð	Opna síðu lyklaborðs.
Opna veftöflu***	Opnaðu veftöfluna.
Til baka úr heimsókn	Fara aftur á fyrri síðu, hætta við heimsókn.
Skipta síðusetti	Skipta yfir í annað síðuset.
Aðgerðir fyrir Board-maker athafnir	Lýsing
Opna Boardmaker athöfn eða möppu ‡	Opna Boardmaker athöfn eða möppu sem Snapsíðu eða sem sprettiglugga.
Opna Boardmaker athafnasafnið ‡	Opna Boardmaker athafnasafnið í Snap. Notandinn getur skoðað möppurnar og spilað athafnirnar í gegnum safnið. Boardmaker athafnasafnið er Snap athafnasafnsmappan á myB-boardmaker.com
Opna núverandi Board-maker athöfn ‡	Opnaðu Boardmaker athöfnina sem er í gangi, ef það á við.

Aðgerðir fyrir hegðunarstuðning	Lýsing
Fyrst svo	Sýna fyrst, svo raðir við sprettiglugga.
Athafnaröð	Sýna athafnaröð í sprettiglugga.
Lýsing	Sýna lýsingu í sprettiglugga.
Sjónrænn tímavaki	Sýna tímavaka í efstu stikunni sem telur niður tiltekinn tíma.
Aðgerðir fyrir aðgangsaðferð	Lýsing
Fínstilla augnstýringu	Hefja fínstillingu augnstýringar.
Gera hlé á aðgangsaðferð	Gerir hlé á og ræsir aftur aðgangsaðferð. Texti á hnappamerki sýnir hvort aðgangsaðferðin er í hléi eða hvort hún er virk. Mögulegar aðgangsaðferðir Músadvöl, augnstýring.
Setja aðgangstíma	Stillir aðgangsaðferðartímabreytu á tilgreint gildi. Tímabreytan sem verður fyrir áhrifum ákvarðast af virku aðgangsaðferðinni þegar <i>Stilla aðgangstíma aðgerðin er virkjuð</i> [†] Til dæmis gætirðu bætt aðgerðinni við þegar aðgangsaðferðin er stillt á Snerting en seinna virkjar notandinn hana með augnstýringaraðgangsaðferðinni til að breyta dvalartíma augntillits.
Sýna stöðu augnstýringar	Sýna stöðu rakningar glugga fyrir augnstýringu.
Aðgerðir fyrir hljóðstyrksstjórnun	Lýsing
Víxlaðu hljóði af hljóðsvörun	Taktu hljóðið af eða settu hljóðið á hljóðsvörun.
Styrkur hljóðsvörunar lækkaður	Lækkaðu styrk hljóðsvörunar.
Styrkur hljóðsvörunar hækkaður	Hækkaðu styrk hljóðsvörunar.
Stilla hljóðstyrk	Stilltu hljóðstyrkinn á ákveðið stig.
Víxlaðu tali af	Taktu hljóðið af eða settu hljóðið á kerfi.
Lækka hljóðstyrk tals	Lækkaðu hljóðstyrk kerfis.
Hækka hljóðstyrk tals	Hækkaðu hljóðstyrk kerfis.
Aðgerðir fyrir umhverfisstjórnun	Lýsing
Senda Google Assistant skipun	Senda textaskipun til Google Assistant. Valkostir: Senda skilaboðatexta hnapps eða senda texta í skilaboðaglugga.
Senda IR merki	Senda tiltekið IR merki.
Aðgerðir fyrir AccessIT	Lýsing
Tengja við AccessIT*	Aftengdu tengt AccessIT tæki og sýndu síðan AccessIT tækisveljara.
Endurstilla AccessIT*	Stöðvaðu tiltekna AccessIT aðgerðir: textaflutninga, haldna lyklaborðslykla, smelli og/eða samfelldar músahreyfingar.
Sendu hnappa texta*	Sendu merki eða skilaboð hnapps í AccessIT tækið.
Senda lyklaborðslykil*	Senda lyklaborðslykil til AccessIT tækisins.
Senda texta í skilaboðaglugga*	Senda núverandi texta í skilaboðaglugga til AccessIT tækisins. [‡]
Senda músasmelli*	Senda músasmelli til AccessIT tækisins.

Aðgerðir fyrir AccessIT	Lýsing
Senda músahreyfingu*	Senda músahreyfingar til AccessIT tækisins.
Senda texta*	Senda texta til AccessIT tækisins.
Aðgerðir fyrir Ræsa önnur forrit	Lýsing
Ræsa forrit	Ræsa tiltekið forrit.
Aðgerðir fyrir tæki	Lýsing
Endurræsa tæki	Endurræsir tækið.
Slökkva á tæki	Slekkur á tækinu.
Víxla heilskjásstillingu	Víxla heilskjásstillingu yfir á kveikt eða slökkt fyrir tækið.
Aðgerðir fyrir Félagaglugga	Lýsing
Félagaglugga birtustig lækkað**	Dregur úr birtustigi félagaglugga.
Félagaglugga birtustig hækkast**	Eykur birtustig félagaglugga.
Víxla straum félagaglugga**	Víxla straum af og á félagaglugga.

* Þessi aðgerð krefst Tobii Dynavox AccessIT 3 tæki. Sjá hluta 8.7.4 AccessIT

* Þessi aðgerð krefst Tobii Dynavox I-13 eða I-16 tækis.

***Sjá hluta 8.7.3 Veftafla

† Þessi aðgerð þarfnast myBoardmaker.com aðgangs og tengds Boardmaker efnis. Sjá hluta 8.7.5 Spila Boardmaker athafnir í Snap:

‡ „Núverandi texti“ segir til um valinn texta í skilaboðaglugganum eða ef ekkert er valið, allan textann í skilaboðaglugganum.

† Listi yfir tímabreytur sem verða fyrir áhrifum frá Stilla aðgangstíma aðgerðinni.

Tafla 8.1 Aðgangstímagraf

Aðgangsaðferð	Tímabreyta sem verður fyrir áhrifum
Augnstýring með dvöl.	Dvalartími
Augnstýring með skiptirofa.	Skipta biðtíma
Augnstýring með blikki.	Lágmarks blikktími
Snerta Enter / Snerta Exit	Biðtími
1 rofa sjálfvirk skönnun	Skönnunarhraði
1 rofa skönnun	Gera hlé á tíma
1 rofa dvalarskönnun	Gera hlé á tíma
Öfug skönnun	Hraði
Músardvöl	Dvalartími
Snerting	ekkt

8.7.1 Eyða aðgerð

1. Veldu  Breyta hnappinn.


2. Veldu hnapp.




3. Veldu **Eyða** hnappi við hlið aðgerðar.
4. Veldu rauða **Eyða** hnappinn til að staðfesta eyðingu.

8.7.2 Endurraða aðgerðum hnapps

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.

3. Veldu og haltu niðri haldi  aðgerðar, dragðu hana síðan í nýja stöðu á lista yfir aðgerðir.

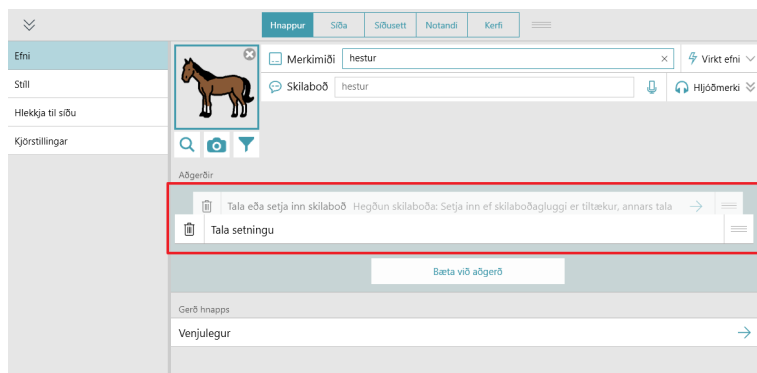


8.7.3 Veftafla



Veftafla er aðeins tiltæk með snertiaðgangsaðferðinni.

Veftaflan er svæði þar sem þú getur sýnt myndir og búið til teikningar fríhendis. Búðu til eins margar töflur og þú vilt. Þær munu viðhaldast þar til þú eyðir þeim.

Til að opna veftöflu skal nota Opna veftöflu aðgerðina á hnappi.

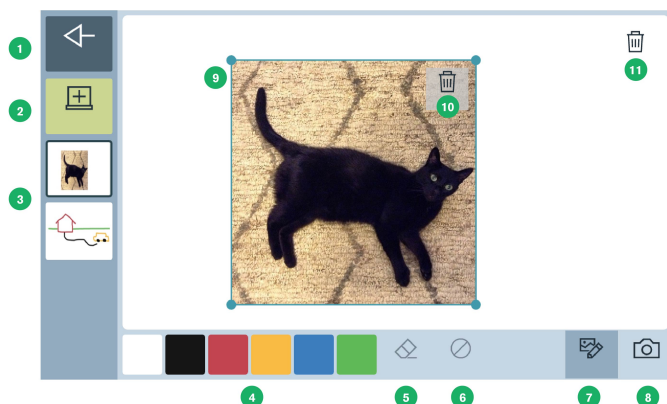

1. **Til baka** — Fara til baka á síðusett.
2. **Ný veftafla** — Búðu til nýja veftöflu.
3. **Listi yfir veftöflur sem þegar eru til** — Veldu hvaða veftöflu sem er til að skoða og breyta.
4. **Teiknisþjald** — Veldu hvaða lit sem er og teiknaðu síðan fríhendis á veftöfluna.
5. **Stroklaður** — Strokaðu út teikningar á ákveðnum svæðum.
6. **Hreinsa** — Hreinsaðu allar teikningar af núverandi veftöflu.
7. **Breyta myndum** — Endurstaðsettu, breyttu stærð eða eyddu myndum af veftöflunni..

8. **Bæta við mynd** — Bættu mynd við veftöfluna. Notaðu innbyggðu myndavélina þína til að taka myndir eða leita að mynd sem geymd er á tækinu þínu.

Aðgerðir fyrir Bæta við mynd

- Taktu mynd
 - Veldu mynd — Athugið: Eingöngu er hægt að fara á samtalsgluggann fyrir þessa aðgerð með Snertingu.
 - Hætta við
9. **Velja mynd** — Smelltu og dragðu frá miðju myndar til að endurstaðsetja. Smelltu og dragðu á horni til að breyta stærð.
 10. **Eyða mynd** — Eyddu valinni mynd.
 11. **Eyða veftöflu** — Eyddu núverandi veftöflu.

8.7.4 AccessIT

Snap styður Tobii Dynavox AccessIT 3, USB Bluetooth tæki sem er notað til að senda lyklaborðsinns látt, músahreyfingar og músasmelli í venjulega Windows 10 tölvu frá tæki sem keyrir Tobii Dynavox Snap Core First forritið. Til að fræðast meira um Tobii Dynavox AccessIT 3 skaltu fara á <http://www.tobiidynavox.com/AccessIT>



AccessIT síður koma með í Core First síðusettum sem búnar eru til með Snap útgáfu 1.7 og nýrri. AccessIT síðubúnt eru tiltæk til innflutnings inn í núverandi síðusett þín á <https://www.mytobiidynavox.com/PagesetCentral>



Héðan í frá í þessu skjali verður vísað til tölvunnar sem fær skipanir sem „tölvun“ og tækisins sem skipanirnar verða sendar frá sem „tjáskiptatækið“.



AccessIT 3 notar Bluetooth® þráðlausa tækni. Minna en 10 metrar (32 fet) þurfa að vera á milli tölvunnar (með tengdu AccessIT 3) og tjáskiptatækisins til að koma á og viðhalda Bluetooth þörun á meðan að AccessIT 3 er í notkun.

Kveikt þarf að vera á bæði tjáskiptatækinu og tölvunni og tækin aflæst áður en byrjað er á skrefunum hér að neðan.

8.7.4.1 Settu upp AccessIT

Tengdu við AccessIT

1. (Á tölvunni) Settu AccessIT 3 í USB tengi.



AccessIT 3 krefst USB 2.0 eða hærra.

Virkjaðu Bluetooth — Windows tjáskiptatæki

1. (Á tjáskiptatækinu) Veldu **Byrja** valmynd, veldu síðan **Stillingar**.
2. Veldu **Tæki**.
3. Veldu **Bluetooth**.
4. Færðu **Bluetooth** í KVEIKT stöðu.

Virkjaðu Bluetooth — iOS (iPAD) tjáskiptatæki

1. (Á tjáskiptatækinu) Farðu á **Stillingar > Bluetooth** og virkjaðu Bluetooth.

8.7.4.2 AccessIT aðgerðir

AccessIT aðgerðir eru hannaðar til að vera notaðar saman. Algengar tölvuaðgerðir eins og smella og draga munu krefjast meira en einnar aðgerðar. Einstökum aðgerðum er lýst hér að neðan.



Ef AccessIT tæki er ekki tengt þegar hnappur með AccessIT aðgerð er valinn, mun (aðgengilegt) AccessIT tækisveljari opnast sjálfvirk.

- Tengja við AccessIT — Aftengdu núverandi AccessIT tæki (ef einhver) og sýndu AccessIT tækisveljara. Þessi aðgerð er gagnleg við að skipta frá einu AccessIT tæki yfir í annað AccessIT tæki. Ekki er nauðsynlegt að nota

Þessa aðgerð til að ræsa allar AccessIT lotur, þar sem allar AccessIT aðgerðir opna sjálfvirk AccessIT tækisveljara ef AccessIT tæki er ekki tengt.

- Endurstilla AccessIT — Stöðvaðu tiltekna skipanagæði sem er verið að framkvæma: lyklaborðslyklar, músasmellir, músahreyfingar og/eða texta.
- Sendu hnappa texta — Sendu hnappa texta til AccessIT tækis. Ef hnappurinn er ekki með texta, sendirðu merki hnappsins.
- Senda lyklaborðslykil — sendu tiltekinn lyklaborðslykil. Valkostir: haltu lyklinum niður og/eða bíddu í tiltekinn tíma eftir að þú sendir lyklaborðslykla (áður en þú framkvæmir næstu aðgerðir).
- Senda texta í skilaboðaglugga — Senda núverandi texta í skilaboðaglugga til AccessIT tækisins. Ef skilaboðaglugginn er táknmyndaður eru táknin ekki send.
- Sendu texta — Sendu tiltekinn texta til AccessIT tækis.
- Senda músasmell — Sendu tiltekna smellgerð (vinstri smellur, hægri smellur, miðsmellur, vinstri tvísmellur). Valkostir: Bíddu í tiltekinn tíma eftir að þú sendir smellinn (áður en þú framkvæmir næstu aðgerðir) og/eða heldur smellinum niðri.
- Senda músahreyfingu — Sendir músahreyfingar til AccessIT tækisins. Músahreyfingar eru gerðar frá núverandi staðsetningu músarinnar. Færðu bláu kúluna í þá stöðu hringins sem passar við átt ákjósanlegrar músahreyfingar, settu síðan inn tölu í fjarlægðarreitin. Fjarlægðareining er minnsta skynjanlega músahreyfingin, sem er á milli 1/300 og 1/200 af tommu, en það fer eftir búnaðinum og músahraðastillingar á tölvunni. Valkostir: samfelld hreyfing (músin heldur áfram að fara í tiltekna átt þangað til önnur aðgerð stöðvar/endurbeinir henni eða hún endar á brún skjásins) og/eða bíður í tiltekinn tíma eftir að þú sendir músahreyfinguna (áður en þú framkvæmir næstu aðgerðir).



Skýringarmynd 8.12 Músahreyfingaátt — Staðsettu bláu kúluna í hringinn til að stilla inn músahreyfingaáttina.



Sumum AccessIT notendum gæti fundist það gagnlegt að virkja Windows-stillinguna „Sýna staðsetningu bendils þegar ég ýti á CTRL lykil“ á tölvunni. Notaðu Senda lyklaborðslykil aðgerðina til að senda CTRL lyklaborðslykil frá Snap og kvikaðir hringir munu birtast tímabundið umhverfis músabendilinn á tölvunni til að gera hann sýnilegri. Til að fara í þessa Windows músastillingu skaltu fara í *Stillingar > Tæki > Mús > Frekari músavalkostir > Bendilsvalkostaflipi*.

8.7.4.3 Tölvu orkustillingar og AccessIT

Tölvan getur aðeins móttækið AccessIT skipanir þegar kveikt er á henni og hún er ekki í hvíld. Til að tryggja ótruflaðan tölvuaðgang, skaltu breyta orkustillingum tölvunnar þannig að hún setji tölvuna (harða diskinn) aldrei í hvíldarstöðu á meðan hún er í sambandi.

Tölvan getur ennþá móttækið AccessIT skipanir þó að skjárin hafi farið í orkusparnaðarham. Þegar AccessIT skipun (lyklaborðslykill, músahreyfing, eða músasmellur) er send úr Snap mun það „vekja“ tölvuskjáinn.

Orkustillingar Windows má finna í *Stillingar > Kerfi > Orka og hvíld*.

8.7.5 Spila Boardmaker athafnir í Snap:

Boardmaker athafnir eru gagnvirkar og prentefni hannað til fræðslu, tjáskipta og fjörs! Þú getur spilað þínar Boardmaker athafnir hér í Snap. Notaðu opna Boardmaker safnaaðgerðina til að skoða og spila athafnir. Eða notaðu opna Boardmaker athafnirnar eða möppurnar til að fara beint í ákveðna athöfn eða möppu. Þú getur einnig gert athafnir aðgengilegar án nettengingar.




Boardmaker athafnir sem eru spilaðar í Snap eru hannaðar fyrir heimanotkunar samhengi, þar sem umönnunaraðili sér um Tobii Dynavox aðganginn fyrir bæði Snap og myBoardmaker. Umönnunaraðilinn í þessu tilviki mun hafa beinan aðgang að Boardmaker athafnamöppu þar sem hann getur sett inn Boardmaker athafnir fyrir notandann.

Í kennslustofu eða meðferðarsamhengi, þar sem kennari eða meðferðaraðili úthlutar Boardmaker athöfnum, ætti nemandinn að ljúka verkefnunum með því að nota Boardmaker 7 Student Center forritið. Boardmaker 7 Student Center forritið er ókeypis að setja upp og nota og er samhæft með flestum tækjum sem styðja Snap Core First. Nemandinn mun líklegast þurfa sérstaka innskráningu frá kennaranum til að fá aðgang að verkefnunum sínum í Boardmaker 7 Student Center forritinu.



Sumar Boardmaker stillingar og aðgerðir eru ekki studdar í Snap. Sjá notendaleiðbeiningarnar fyrir Boardmaker 7 fyrir listann af óstuddum eiginleikum.

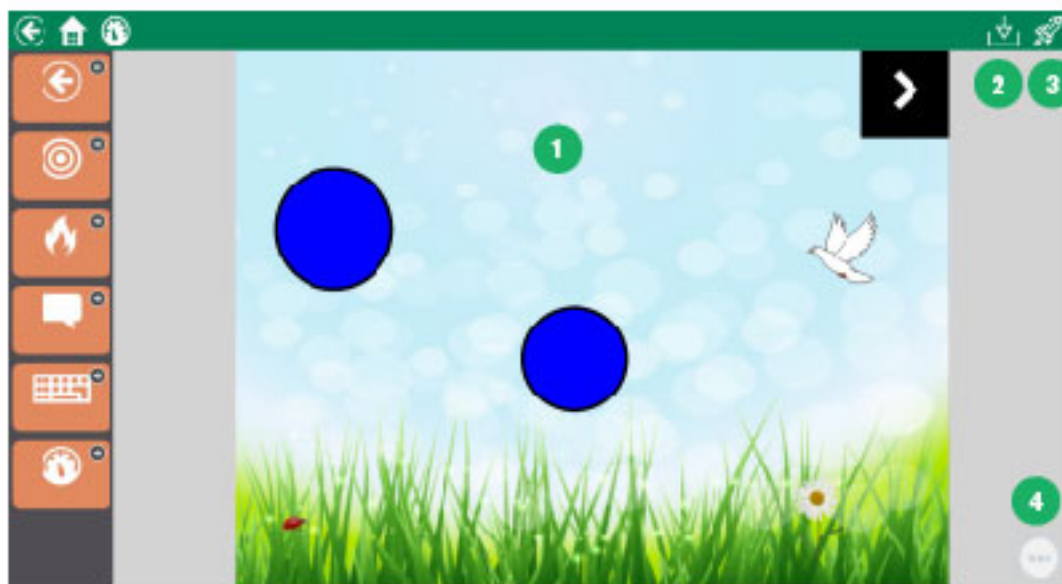

Skýringarmynd 8.13 Boardmaker athöfn í gangi í Snap

1	Athöfn	Boardmaker athafnirnar spilast sjálfkrafa á aðalsíðu Snap svæðisins. Þú getur einnig spilað Boardmaker athafnir í sprettiglugga ef þú heimilast <i>Spila í sprettiglugga</i> þegar þú bætir einni athöfninni í Boardmaker athöfnunum á hnapp.
2	Stjórnaðu aðgengi án nettengingar	Veldu athafnir í þessum glugga til að hlaða niður og gera aðgengilegar án nettengingar. Hægt verður að spila völdu athafnirnar án nettengingar í Snap.
3	Fara í myBoardmaker	Ræsa myBoardmaker.com í vafraglugga.
4	Boardmaker athafnarvalmyndartákn	Opnaðu Boardmaker athafnarvalmyndina til að nálgast eftirfarandi hnappa:



- Til baka — Farðu úr athöfninni og snúðu aftur á fyrri síðu.
- Safn — Farðu á Boardmaker safnið á Snap.
- Endurræsa — Byrjaðu upp á nýtt í núverandi athöfn.
- Færa — Færðu Boardmaker athafnarvalmyndartáknið í annað horn á skjánum.

8.7.5.1 Stílltu athafnir á Boardmaker Online

Til að gera Boardmaker athafnir aðgengilegar í Snap verður þú að vera með aðgang á myBoardmaker.com. Aðgangar á Community stigi eru ókeypis. Farðu inn á myBoardmaker.com og skráðu þig inn með Tobii Dynavox aðgangsupplýsingunum sem þú notar í Snap til að búa til ókeypis myBoardmaker Community aðgang.



Vefsíðan myBoardmaker er, eins og er, eingöngu á ensku. Hins vegar eru Boardmaker athafnir aðgengilegar á mörgum tungumálum.



Áður en þú byrjar skaltu passa upp á að þú hafir nettengingu og sért skráður inn á Tobii Dynavox aðganginn þinn í Snap.

1. Veldu **Stjórnborð** í Snap og veldu svo **Boardmaker athafnir** hnappinn.



Ef þú ert ekki með Boardmaker athafnahnappinn á stjórnborðinu þínu geturðu búið til hnapp með opna Boardmaker athafnasafn aðgerðinni, veldu síðan þann hnapp í notkunarham. Þegar opna Boardmaker athafnasafn aðgerðin er notuð í fyrsta skipti býr það til nauðsynlegar möppur á Boardmaker Online aðganginum þínum.

2. Opnaðu vefvafta og farðu á myBoardmaker.com
3. Veldu **Skrá inn**, stimplaðu síðan inn Tobii Dynavox aðgangsorðin þín. Ef þú hefur ekki skráð þig inn á myBoardmaker.com áður, verður þú að nýskrá þig fyrir ókeypis Community aðgang eða hefja áskrift.
4. Veldu **Minn Boardmaker**.
5. Veldu möppuna **Snap athafnir**.
6. Bættu athöfnum og möppum við Snap athafnamöppuna til að gera þær aðgengilegar í gegnum Snap aðgerðirnar.



Snap aðgerðarmappan er forhlaðin með mörgum fríum athöfnum til að hjálpa þér að byrja. Sumar af vinsælustu athöfnunum eru reiknivélin, teningur, og lukkuhjóla athafnir sem finna má í stærðfræðitóla möppunni.



Snap aðgerðarmappan á myBoardmaker er Boardmaker athafnasafnið á Snap.

8.7.5.2 Opna Boardmaker athafnasafnið.

Notið þessa aðgerð til að leyfa notandanum að skoða allar Boardmaker athafnirnar í Snap athafnamöppunni á myBoardmaker í Snap. Í gegnum Boardmaker athafnasafnið getur hann valið sér athöfn til að spila.



Allar athafnir í safninu eru aðgengilegar til að spila ef það er virk nettenging á tækinu. Án nettengingar er eingöngu hægt að spila athafnir sem þegar er búið að hlaða niður eða sem eru í minninu. Sjá hluta 8.7.5.5 *Boardmaker athafnir, aðgengi án nettengingar*.

1. Farðu á síðu þar sem þú vilt hafa hnapp sem tengist Boardmaker athafnasafninu þínu.
2. Veldu  **Breyta** hnappinn.
3. Veldu hnappinn sem þú vilt nota til að opna Boardmaker athafnasafnið.
4. Veldu **Bæta við aðgerð**.
5. Skrúnaðu niður í Boardmaker athafnasafnshlutann og veldu **Opna Boardmaker athafnasafn**.

8.7.5.3 Opna Boardmaker athöfn

Spilaðu ákveðna athöfn í Boardmaker safninu.



Allar athafnir í safninu eru aðgengilegar til að spila ef það er virk nettenging á tækinu. Án nettengingar er eingöngu hægt að spila athafnir sem þegar er búið að hlaða niður eða sem eru í minninu. Sjá hluta 8.7.5.5 *Boardmaker athafnir, aðgengi án nettengingar*.

1. Farðu á síðuna sem þú vilt tengja hnapp við sem leiðir á Boardmaker athöfnina.
2. Veldu  **Breyta** hnappinn.

3. Veldu hnappinn sem þú vilt nota til að opna Boardmaker athöfnina.
4. Veldu **Bæta við aðgerð**.
5. Skrunaðu niður í Boardmaker athafnasafnshlutann og veldu **Opna Boardmaker athafnasafn**. Snap aðgerðarsíðan mun opnast.
6. Flettu í gegnum möppurnar og finndu athöfnina sem þú vilt spila. Veldu athöfnina.
7. Ef þú vilt að athöfnin opnast í sprettiglugga, virkjaðu **Opna í sprettiglugga**. Annars mun athöfnin opnast sem síða í Snap.



Athafnir sem eru opnaðar í sprettiglugga leyfa notandanum ekki að fara úr glugganum og koma til baka á sama stað og áður. Sprettigluggar er best að nota fyrir stuttar athafnir sem auðvelt er að endurræsa frá byrjun.

8. Veldu **Velja athöfn**. Til að hætta án þess að vista, veldu Hætta við.



Merki hnappsins uppfærast sjálfkrafa með nafni tengdu athafnarinnar.

8.7.5.4 Opna Boardmaker möppur

Opnaðu ákveðna möppu í Boardmaker safninu þínu. Úr möppunni getur notandinn valið athafnir til að spila í Snap.



Þú getur úthlutað Boardmaker athöfnum til notandans með því að búa til möppu fyrir hann í Snap athafnamöppunni á myBoardmaker.com og tengjast síðan möppunni í Snap síðusettingu þeirra. Færðu athafnir yfir í möppuna eins og þarf og notandinn mun sjá athafnirnar á Snap (notandinn verður að hafa nettengingu og að vera skráður inn á myTobiiDynavox aðganginn þeirra á Snap til að fá uppfærðar athafnir).



Allar athafnir í safninu eru aðgengilegar til að spila ef það er virk nettenging á tækinu. Án nettengingar er eingöngu hægt að spila athafnir sem þegar er búið að hlaða niður eða sem eru í minninu. Sjá hluta 8.7.5.5 *Boardmaker athafnir, aðgengi án nettengingar*.

1. Farðu á síðuna sem þú vilt tengja hnapp við sem leiðir á Boardmaker athöfnina.
2. Veldu  **Breyta** hnappinn.
3. Veldu hnappinn sem þú vilt nota til að opna Boardmaker möppuna.
4. Veldu **Bæta við aðgerð**.
5. Skrunaðu niður í Boardmaker athafnasafnshlutann og veldu **Opna Boardmaker athafnasafn**. Snap aðgerðarsíðan mun opnast.
6. Farðu í möppuna sem þú vilt tengjast, þannig að þú sért innan viðeigandi möppu.
7. Veldu **Velja möppu**. Til að hætta án þess að vista, veldu Hætta við.



Merki hnappsins uppfærast sjálfkrafa með nafni tengdu möppunnar.

8.7.5.5 Boardmaker athafnir, aðgengi án nettengingar

Þú getur hlaðið niður Boardmaker athöfnum á tækið sem þú kýst til að þær séu aðgengilegar til að spila þegar tækið er ekki nettengt.



Athöfnum án nettengingar er hlaðið niður á hvert tæki. Ef að síðusettingu er samstillt eða deilt á annað tæki þarf að endurtaka niðurhalsferlið á því tæki til að gera athöfnina aðgengilega án nettengingar.

1. Opna Boardmaker safnið í Snap. Sjá hluta 8.7.5.2 *Opna Boardmaker athafnasafnið*.
2. Opnaðu möppu til að sjá lista yfir athafnirnar.
3. Veldu  Stjórnaðu aðgengi án nettengingar
4. Hakaðu við boxið við hliðina á athöfninni sem þú vilt hlaða niður á tækið þitt fyrir spilun án nettengingar.



Á athöfnum sem sýna  táknir heppnaðist að hlaða niður og er athöfnin aðgengileg á þessu tæki án nettengingar.

5. Veldu **X** til að loka glugganum þegar þú hefur klárað að hlaða niður athöfnum úr þessari möppu.
6. Endurtaktu skrefin að ofan í hverri möppu sem inniheldur athafnir sem þú vilt geta notað án nettengingar.



Þegar athöfn sem er ekki merkt til notkunar án nettengingar er spiluð þegar það er nettenging, er henni hlaðið niður sem tímabundinni skrá. Af þeirri ástæðu verður hægt að spila sumar athafnir án nettengingar, sem áður hafa verið spilaðar en eru ekki merktar sérstaklega sem aðgengilegar án nettengingar. Aðgengi þessara athafna er ekki tryggt.

8.7.5.6 Opna Boardmaker athöfnina sem er í gangi

Ef að notandinn er að spila Boardmaker athöfn í Snap og fer út úr athöfninni yfir á aðra síðu getur hann farið aftur í Boardmaker athöfnina á sama stað og áður.



Þessi aðgerð er bara möguleg með athafnir sem spilaðar eru í aðal Snap glugganum. Þetta virkar ekki þegar athafnir eru opnaðar í sprettiglugga.

1. Farðu á síðuna sem þú vilt tengja hnapp við sem leiðir aftur á Boardmaker athöfnina sem er í gangi.



2. Veldu **Breyta** hnappinn.

3. Veldu hnappinn sem þú vilt nota til að fara á Boardmaker athöfnina sem er í gangi.

4. Veldu **Bæta við aðgerð**.


5. Skrundaðu niður í Boardmaker athafnarsafnshlutann og veldu **Opna Boardmaker athafnasafn**.



Ef það er engin Boardmaker athöfn í gangi verður hnappurinn sjálfkrafa óvirkur. Þegar Boardmaker athöfn er í gangi verður hnappurinn sjálfkrafa virkur og miðinn sýnir nafn og smámynd athafnarinnar.

8.8 Hnappastíll

Breyttu útliti hnappsins í hnappastílflokknum.

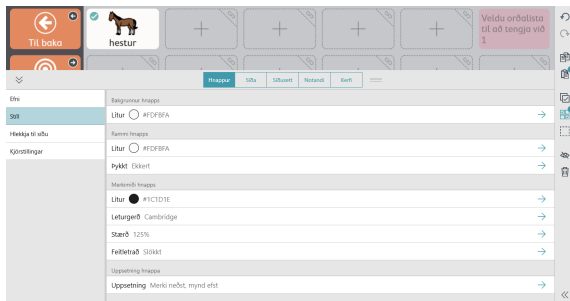

8.8.1 Bakgrunnur hnapps



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Litur** undir bakgrunni hnapps.
5. Veldu lit.



Þú getur búið til þína eigin sérsniðnu liti! Sjá hluta 8.17 *Sérsniðnir litir*.

8.8.2 Rammi hnapps

8.8.2.1 Litur ramma



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Litur** undir hnapparammi.
5. Veldu lit.



Þú getur búið til þína eigin sérsniðnu liti! Sjá hluta 8.17 *Sérsniðnir litir*.

8.8.2.2 Þykkt ramma



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Þykkt** undir hnapparammi.
5. Veldu þykkt ramma — enginn, mjór, meðal eða þykkur.



Skýringarmynd 8.14 Rammi hnapps: Enginn, mjór, meðal og þykkur.

8.8.3 Merki hnapps

8.8.3.1 Litur



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Litur** undir merki hnapps.
5. Veldu lit.



Þú getur búið til þína eigin sérsniðnu liti! Sjá hluta 8.17 *Sérsniðnir litir*.

8.8.3.2 Leturgerð



Sjálfvalin stilling er stílt inn á síðusettsflípanum. Ef þú vilt hunsa sjálfvaldar stillingar síðusettsins í þessu tilviki, skaltu stilla jafna síðusettt á **Slökkt**. Til að samstillja þessar stillingar með afganginum af síðusettninu, stillirðu jafna síðusettt á **Kveikt**.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Leturgerð** undir merki hnapps.
5. Veldu leturgerð.

8.8.3.3 Stærð



Sjálfvalin stilling er stíllt inn á síðusettsflípanum. Ef þú vilt hunsa sjálfvaldar stillingar síðusettsins í þessu tilviki, skaltu stílla jafna síðuset á **Slökkt**. Til að samstílla þessar stillingar með afganginum af síðusettnu, stíllirðu jafna síðuset á **Kveikt**.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Stærð** undir merki hnapps.
5. Veldu stærð.

8.8.3.4 Feitletrað



Sjálfvalin stilling er stíllt inn á síðusettsflípanum. Ef þú vilt hunsa sjálfvaldar stillingar síðusettsins í þessu tilviki, skaltu stílla jafna síðuset á **Slökkt**. Til að samstílla þessar stillingar með afganginum af síðusettnu, stíllirðu jafna síðuset á **Kveikt**.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Feitletrað** undir merki hnapps.
5. Settu feitletrun á **Kveikt** eða **Slökkt**.

8.8.3.5 Uppsetning hnappa



Sjálfvalin stilling er stíllt inn á síðusettsflípanum. Ef þú vilt hunsa sjálfvaldar stillingar síðusettsins í þessu tilviki, skaltu stílla jafna síðuset á **Slökkt**. Til að samstílla þessar stillingar með afganginum af síðusettnu, stíllirðu jafna síðuset á **Kveikt**.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Uppsetning hnappa** undir merki hnapps.
5. Veldu uppsetningu úr listanum.




Merki efst, mynd neðst




Merki neðst, mynd efst




Merki vinstri, mynd hægri

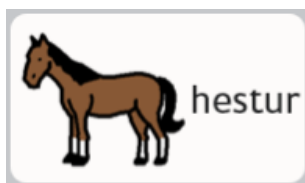

Merki hægri, mynd vinstri

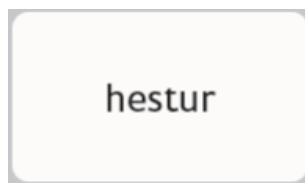

Aðeins merki

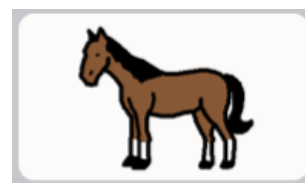

Aðeins mynd

8.9 Tengja á síðu / búa til nýja síðu

Tenglahnappur opnar nýja síðu þegar hann er valinn. Sjálfvalið er að tenglahnappar séu auðkenndir með þessu tákni



eða heimsækja tákninu



. Til að breyta útliti tengla og heimsækja hnappa, sjá kafla 9.3.5 *Útlit tengla síðusetts*.

8.9.1 Búðu til tengla hnapp í tómu hólfi



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu tengla táknið í tómu hólfi.



- Til að tengja við glænýja síðu, sjá kafla 8.9.3 *Tengja á nýja síðu / búa til nýja síðu*.
- Til að tengja við síðu sem er til, sjá kafla 8.9.4 *Tengja á síðu sem er til*.
- Til að tengja við (nýtt) afrit af síðu sem er til, sjá kafla 8.9.5 *Tengja á nýtt afrit af síðu sem er til*.
- Til að flytja inn og tengja við síðu, sjá kafla 8.9.6 *Flytja inn og tengja á síðu*.

8.9.2 Búa til tengil þar sem hnappur er þegar til



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnappinn sem þú vilt búa til tengil frá.
3. Veldu **Hnappinn** flipann.
4. Veldu **Aðgerð** flokkur.
5. Veldu **Bæta við aðgerð**.
6. Veldu **Tengja**.

- Til að tengja við glænýja síðu, sjá kafla 8.9.3 *Tengja á nýja síðu / búa til nýja síðu*.
- Til að tengja við síðu sem er til, sjá kafla 8.9.4 *Tengja á síðu sem er til*.
- Til að tengja við (nýtt) afrit af síðu sem er til, sjá kafla 8.9.5 *Tengja á nýtt afrit af síðu sem er til*.
- Til að flytja inn og tengja við síðu, sjá kafla 8.9.6 *Flytja inn og tengja á síðu*.

8.9.3 Tengja á nýja síðu / búa til nýja síðu

1. Veldu **Tengja á nýja síðu**. Ný síða svar opnast.
2. Sláðu síðuheiti inn í **Heiti** reitinn. Veldu tákn eða veldu **X** ef þú vilt ekki velja tákn fyrir síðuna.
3. Veldu **Búa til** til að búa til tengil og nýju síðuna. Veldu **Hætta við** til að fara til baka án þess að vista.

8.9.4 Tengja á síðu sem er til

1. Veldu **Tengja á síðu sem er til**. Tengill á síðu sem er til svar opnast.
2. Veldu síðu úr listanum.



Sláðu inn í leitarreitinn til að finna tiltekna síðu eða veldu nýlega opnað til að finna síðu sem þú heimsóttir nýlega.

3. Veldu **Vista** til að búa til tengil. Veldu **Hætta við** til að fara til baka án þess að vista.

Til að læra um heimsækja síðu, sjá kafla 8.9.7 *Heimsækja síðu*.

8.9.5 Tengja á nýtt afrit af síðu sem er til

Þessi tengjaðferð gerir þér kleift að nota síðu sem forsníð fyrir nýju síðuna sem þú býrð til.

1. Veldu **Tengja á afrit af síðu**. Tengill á afrit af síðu svar opnast.
2. Veldu síðu úr listanum.



Sláðu inn í leitarreitinn til að finna tiltekna síðu eða veldu nýlega opnað til að finna síðu sem þú heimsóttir nýlega.

3. Settu inn heiti fyrir nýju síðuna í heiti reitinn.
4. Veldu **Vista** til að búa til afrit af valinni síðu og tengilinn. Veldu **Hætta við** til að fara til baka án þess að vista.

Til að læra um heimsækja síðu, sjá 8.9.7 *Heimsækja síðu*.

8.9.6 Flytja inn og tengja á síðu

Ef þú ert með síðubúntsskrá sem inniheldur síðu sem þú vilt tengja við getur þú flutt inn síðuna og tengt við hana í einu skrefi með flytja inn og tengja á síðu.

1. Veldu **Flytja inn og tengja á síðu**. Þú getur valið að flytja inn frá myTobiiDynavox eða frá staðbundinni skrá:

Frá myTobiiDynavox

- a. Veldu **Frá myTobiiDynavox**.
Þú gætir verið beðin/n um að skrá þig inn á TobiiDynavox. Valið síðubúnt frá myTobiiDynavox svar opnast.
- b. Veldu síðubúntið sem þú vilt flytja inn og veldu síðan **Næst**.
- c. Veldu síðuna sem þú vilt tengja við og veldu síðan **Flytja inn**.



Síðuárekstur gerist þegar síðubúntið inniheldur eina eða fleiri síður sem eru þegar til á tækinu en eru ekki eins. Veldu hvert síðuárekstur  tákn veldu síðan hvort þú heldur síðunni sem er til eða skrifa yfir með innfluttu síðunni úr síðubúntinu. Þú þarft að leysa úr öllum síðuárekstrum á þennan hátt áður en þú getur haldið áfram með innflutning síðubúntsins.

Frá staðbundinni skrá

- a. Veldu **Frá staðbundinni skrá**. Flytja inn síðubúnt frá staðbundinni skrá svarið opnast.
- b. Veldu **Vafra**. Farðu á viðeigandi síðubúnt (.spb) og veldu síðan **Opna**.
- c. Veldu **Næst**.
- d. Veldu síðuna sem þú vilt tengja við og veldu síðan **Flytja inn**.



Síðuárekstur gerist þegar síðubúntið inniheldur eina eða fleiri síður sem eru þegar til á tækinu en eru ekki eins. Veldu hvert síðuárekstur  tákn veldu síðan hvort þú heldur síðunni sem er til eða skrifa yfir með innfluttu síðunni úr síðubúntinu. Þú þarft að leysa úr öllum síðuárekstrum á þennan hátt áður en þú getur haldið áfram með innflutning síðubúntsins.

8.9.7 Heimsækja síðu

Þegar þær eru virkjaðar setur heimsækja síðu stillingar inn tengil til að senda notanda aftur á fyrri síðu eftir að hann velur

val sem virkjar endursendingu á tengdu síðunni. Tenglahnappar sem hafa heimsækja síðu virkjað sýna þetta tákn: 

Svona virkar heimsækja síðu

1. Velja heimsækja síðutengil hnapp. Tengda síðan opnast.
2. Veldu á tengdu síðunni.*
Fyrri síðan (sem inniheldur heimsækja síðu tengil hnappinn) opnast.



* Til þess að virkja endursendingu á fyrri síðu þarf valinn hnappur *annað hvort* að innihalda eitt af eftirfarandi aðgerðum:

- Tala eða setja inn skilaboð
- Tala setningu
- Til baka úr heimsókn

Eða, vera einn af eftirfarandi hnappagerðum sem virkjar einnig endursendingu á fyrri síðu:

- Málfræðihnappur
- Beygingahnappur
- Spáhnappur
- Lyklaborð á skjá hnappur forritaður með lyklagerð = bil

Eftirfarandi aðgerðir og hnappagerðir framlengja heimsóknarham og *virkja ekki* endursendingu á síðustu síðu:

- Lengja heimsókn
- Fara til baka
- Tengill
- Undirskilið efni
- Gera hlé á aðgangsaðferð
- Spjall

Ef hnappur inniheldur margar aðgerðir (einhverjar sem virkja endursendingu á síðustu síðu og einhverjar sem lengja heimsóknarham) er endursending á síðustu síðu ekki virkjuð nema hnappurinn innihaldi líka Til baka úr heimsókn.


Eftirfarandi aðgerðir hætta við heimsókn:

- Hætta við heimsókn
- Fara heim
- Opna stjórnborð
- Opna lyklaborð

8.9.7.1 Virkja heimsækja síðu á tengill hnappur



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu tengil-hnappinn.

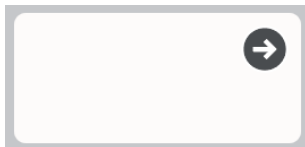

Skýringarmynd 8.15 Tengja við dæmi hnappur

3. Veldu **Aðgerð** flokkur.
4. Veldu **Tengja** aðgerð.
5. Stilltu **Heimsækja síðu** á kveikt.

8.9.7.2 Lengja, hætta við eða endursenda úr heimsókn

Hægt er að nota aðgerðir til að trufla eða framlengja síðuheimsókn sem á sér stað eftir að heimsækja hnappur er valinn. Ef valinn hnappur á heimsækja síðunni inniheldur eina af eftirfarandi aðgerðum mun það breyta venjulegri heimsóknarhegðun á tiltekinn hátt:

- Lengja heimsókn — vera áfram í heimsóknarham, þrátt fyrir aðgerðina(irnar) á þessum hnappi.
- Hætta við heimsókn — fara úr heimsóknarham en vera áfram á núverandi síðu.
- Til baka úr heimsókn — fara úr heimsóknarham strax (áður en eftirfarandi aðgerðir á þessum hnappi eru framkvæmdar) og fara aftur á upphaflega síðu. Allar aðgerðir á hnappnum eru framkvæmdar.

8.10 Búa til skilaboðaglugga á síðunni




Skýringarmynd 8.16 Síða með skilaboðaglugga



Skilaboðasláin verður að vera falin á síðunni áður en hægt er að búa til skilaboðaglugga á þeirri síðu.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflipann**.
3. Veldu **Kjörstillingar**.
4. Afvirkja sýnileika skilaboðaslár á síðu **Jafna saman síðusettt** stillingar.
5. Afvirkja **Skilaboðaslá** stillingar. Skilaboðasláin á þessari síðu er nú falin.

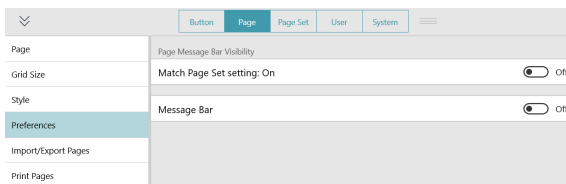

6. Veldu hornið upp til hægri í tómu hólfi á síðunni.



7. Veldu **Skilaboðagluggi** úr valmyndinni.



Aðeins einn skilaboðagluggi er leyfður á hverri síðu.



Skilaboðagluggann á síðunni er hægt að færa og breyta stærð á sama hátt og hnappar. Sjá hluta 8.3 *Færa hnapp* og 8.4 *Breyta stærð hnapps*. Skilaboðaglugginn heldur stílstillingum sem stilltar eru á síðusetts stiginu. Sjá hluta 9.3 *Stíll síðusetts*.

8.11 Málareglur hnapps

Stillingar tungumálareglna gera þér kleift að tiltaka tungumálið sem verður notað fyrir táknaleit, táknmyndun, orðaspá, beygingu, sjálfvirka bræðingu og talrödd (ef tungumála-sértæk rödd er stillt inn fyrir tungumálið) fyrir hnappinn.

Hnappar erfa sjálfvaldar stillingar tungumálareglna frá stillingum á síðusettsplani eða stillingum síðusetts. Hægt er að stilla tungumálareglur fyrir hnapp handvirkir með því að fylgja eftirfarandi skrefum:



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Kjörstillingar** flokkur.
4. Veldu **Málareglur**.
5. Veldu tungumál úr listanum:

- a. **Tungumál sem eru studd að fullu** — hefur áhrif á tungumálaleit, táknmyndun, orðaspá, beygingu, sjálfvirka bræðingu og talrödd (ef tungumála-sértæk rödd hefur verið stillt inn fyrir tungumálið). **Tungumál** er aðallega notað með sérmöfnum (til dæmis Harriet Tubman eða Amsterdam). Þegar orð sem eru merkt hlutlaus eru send í skilaboðagluggan verða þau sögð í samræmi við tungumálareglur annarra orða sem eru fyrir í skilaboðaglugganum. Ef skilaboðaglugginn er tómur að öðru leyti, verða hlutlausu orðin sögð í samræmi við stillingar tungumálareglna núverandi eða nýlegustu síðu sem var ekki hlutlaus.

- b. **Önnur tungumál** — tungumálin í þessum flokki hafa breytilegt stuðningsstig innan Snap Core First forritsins.

8.12 Fjarstýringar

Sum Tobii Dynavox tæki, svo sem Indi og I-100, eru búin innrauðum sendi sem hægt er að stjórna í gegnum Snap hugbúnað, sem gerir það að verkum að hægt er að nota þessi tæki sem fjarstýringar fyrir búnað eins og sjónvörp og hljómflutningstæki. Core First síðusettið kemur með forgerðum fjarstýringasíðum á stjórnborðinu. Þessar fjarstýringasíður innihalda hnappa sem eru tilbúnir undir forritun með fjarstýringarskipunum.



Snap fjarstýringar virka ekki með Tobii Dynavox I-12(+) eða I-15(+) tækjum.

8.12.1 Forritun fjarstýringarhnapps



Aðeins þarf að forrita hvern hnapp einu sinni.

Vertu með fjarstýringuna við höndina. Þú þarft hana til að kenna tækinu þínu IR-skipunina.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnappinn á skjánum sem þú vilt forrita til að senda IR-skipunina.
3. Veldu **Hnappinn** flipann.
4. Veldu **Aðgerð** flokkur.
5. Veldu **Bæta við aðgerð**.
6. Veldu **Senda IR merki**.
7. Veldu **Taka upp**, beindu síðan fjarstýringunni að IR spjaldinu á Tobii Dynavox tækinu og ýttu á hnappinn á fjarstýringunni.
8. Ef þú sérð skilaboðin „upptaka tókst!“ skaltu velja **Búið**.
Ef þú sérð skilaboðin „Ekkert merki fannst. Reyndu aftur.“ farðu aftur í skref 7.

8.12.2 Notkun fjarstýringa



Fjarstýringar eru aðeins tiltækar fyrir samhæfð Tobii Dynavox tæki.

Þú þarft að stilla fjarstýringuna fyrirfram með því að forrita hvern fjarstýringarhnapp með rétttri IR-skipun. Sjá 8.12.1 Forritun fjarstýringarhnapps.




Skýringarmynd 8.17 Stjórnborð — Fjarstýringarhnappar

1. Farðu á fjarstýringarsíðu sem samsvarar búnaðinum (sjónvarp, hljómflutningstæki o.s.frv.) sem þú vilt stjórna.
2. Beindu IR-glugganum á Tobii Dynavox tækinu í átt að búnaðinum sem þú vilt stjórna.
3. Veldu hnappinn fyrir viðeigandi skipun.

8.13 Breyta síðu


Breytingar gerðar á síðuflipa munu aðeins hafa áhrif á *núverandi síðu*. Hægt er að nota stillingar á síðuflipanum til að hún sa sumar síðustillingar. Til dæmis ef þú vilt að skilaboðasláin sé sjáanleg á flestum síðum en ekki á stjórnborðssíðunni, myndir þú gera eftirfarandi: 1. Virkja skilaboðaslá í síðusettsstillingum. 2. Fara á stjórnborðssíðu. 3. Velja síðuflipann. 4. Velja kjörstillingar. 5. Í sýnileiki skilaboðaslár á síðu, skaltu óvirkja jafna stillingar síðusetts: kveikt. 6. Stilltu sýnileika skilaboðaslár á slökkt.

8.13.1 Nafn síðu

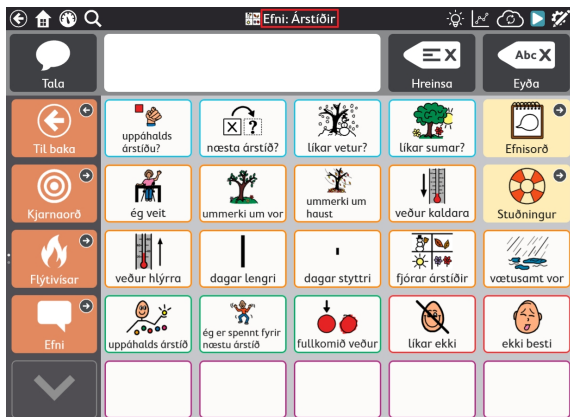


Skýringarmynd 8.18 Nafn síðu

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflipann**.
3. Sláðu inn **Merki** reitinn til að breyta heiti síðu.

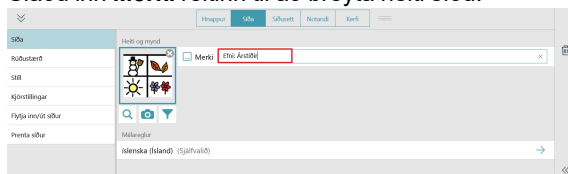

8.13.2 Tákn síðu

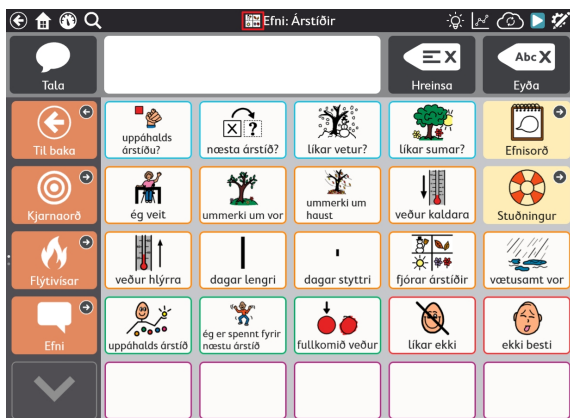

Skýringarmynd 8.19 Tákn síðu

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.

- Til að leita að tákni:

-



- b. Sláðu inn í textareitinn til að fínstilla leitarskilmála.
- c. Veldu viðeigandi ták.
- d. Veldu **Búið**.

- 

- b. Veldu **Frá myndavél**.

- Til að nota mynd sem geymd er á tækinu:

-

Ef þú vilt ekki nota síðutákn skaltu velja **X** á síðutákn.

8.13.3 Málareglur síðu

Stillingar málareglna síðu stilla sjálfvirkar málareglur fyrir hnappa á síðunni. Stillingar tungumálareglna stjórna tungumálinu sem verður notað fyrir táknaleit, táknmyndun, orðaspá, beygingu, sjálfvirka bræðingu og talrödd (ef tungumála-sértæk rödd er stillt inn fyrir tungumálið).

Hnappar erfa sjálfvaldar stillingar tungumálareglna frá stillingum á síðusettsplani eða stillingum síðusetts. Þegar þú stillir inn málareglur síðu taka allir hnappar sem eru á síðunni þá stillingu og nýir hnappar sem gerðir eru á síðunni verða líka sjálfkrafa með þá stillingu. Til að breyta málareglum fyrir tiltekna hnappa, sjá kafla 8.11 *Málareglur hnapps*.

- 

- Tungumál sem eru studd að fullu** — hefur áhrif á tungumálaeit, táknmyndun, orðaspá, beygingu, sjálfvirka bræðingu og talródd (ef tungumála-sértæk rödd hefur verið stillt inn fyrir tungumálið). **Tungumál** tungumál er aðallega notað með sérnöfnum (til dæmis Albert Einstein eða Coca-Cola). Þegar orð sem eru merkt hlutlaus eru send í skilaboðagluggann verða þau sögð í samræmi við tungumálareglur annarra orða sem eru fyrir í skilaboðagluggunum. Ef skilaboðaglugginn er tómur að öðru leyti, verða hlutlausu orðin sögð í samræmi við stillingar tungumálareglna síðusettsins.

8.13.4 Rúðustærð síðu



Sjálfvalin stilling er stílt inn á síðusettsflípanum. Ef þú vilt hunsa sjálfvaldar stillingar síðusettsins í þessu tilviki, skaltu stilla jafna síðuset á **Slökkt**. Til að samstillja þessar stillingar með afganginum af síðusettnu, stillirðu jafna síðuset á **Kveikt**.

8.13.4.1 Breyta rúðustærð síðu



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflipann**.
3. Veldu **Rúðustærð** flokkur.
4. Stílltu **Stillingar jafna saman síðuseti á Slökkt**.
5. Veldu **rúðustærð**.
6. Veldu fyrirfram tilbúna rúðustærðir eða stílltu fjölda raða og dálka til að búa til sérsniðna rúðustærð.




Ef þú ert ekki að búa til algjörlega sérsniðna síðu er þér eindregið ráðlagt að nota fyrirfram tilbúna rúðustærðir síðusettsins. Fyrirfram tilbúna rúðustærðir munu sýna forútfyllt síðuefnið eins og það er hannað af sérfræðiteymi okkar, en aðrar rúðustærðir gera það ef til vill ekki.



Ef þú vilt sýna skilaboðaslánna og/eða verkfærastiku verður þú að velja rúðustærð 3x3 eða stærri. Til að breyta stærð bila á milli hnappa, sjá kafla 9.3.6 *Rúðujaðar síðusetts*.


Tafla 8.2 Dæmi um rúðustærðir (ekki ítarlegt)

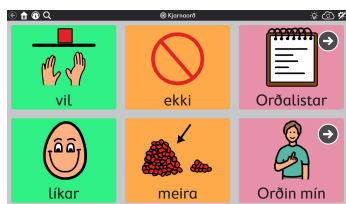

2x3



3x4

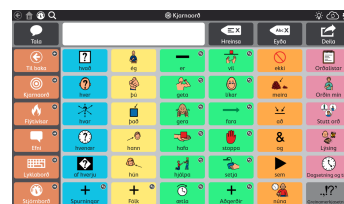

6x6

8.13.5 Bakgrunnslitur síðu



Sjálfvalin stilling er stílt inn á síðusettsflípanum. Ef þú vilt hunsa sjálfvaldar stillingar síðusettsins í þessu tilviki, skaltu stilla jafna síðuset á **Slökkt**. Til að samstillja þessar stillingar með afganginum af síðusettnu, stillirðu jafna síðuset á **Kveikt**.

1. Farðu á síðuna sem þú vilt hafa annan bakgrunnslit á.
2. Veldu **Breyta** hnappinn.
3. Velja **síðuflipann**.
4. Veldu **Stíll** kafli.
5. Stílltu bakgrunnslitur síðu jafna saman við síðuset á **Slökkt**.
6. Veldu **Lit**. Listi yfir bakgrunnsliti síðu mun opnast.
7. Veldu lit.



Þú getur búið til þína eigin sérsniðna liti! Sjá hluta 8.17 *Sérsniðnir litir*.

8.13.6 Sýna/fela skilaboðaslá.



Sjálfvalin stilling er stílt inn á síðusettsflípanum. Ef þú vilt hunsa sjálfvaldar stillingar síðusettsins í þessu tilviki, skaltu stilla jafna síðuset á **Slökkt**. Til að samstillja þessar stillingar með afganginum af síðusettnu, stillirðu jafna síðuset á **Kveikt**.

8.13.6.1 Breyta sýnileika skilaboðaslár



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflípann**.
3. Veldu **Kjörstillingar** flokkur.
4. Stílltu **Stillingar jafna saman síðusetti** á **Kveikt** til að jafna við tiltekna stillingu eða **Slökkt** til að gera sýnileika skilaboðaslár öðruvísi á þessar síðu en á hinum síðunum í síðusettinu.

8.13.7 Eyða síðu



Eyðing er varanleg aðgerð. Aðeins eyða síðu ef þú ert viss um að þú munir ekki vilja nota hana aftur í framtíðinni.

1. Farðu á síðuna sem þú vilt eyða.



2. Veldu **Breyta** hnappinn.
3. Velja **síðuflípann**.



4. Veldu **Eyða**. Eyða síðu svar opnast.
5. Veldu **Eyða** hnappinn til að eyða síðunni varanlega eða veldu **Hætta við** til að fara aftur í síðustillingar án þess að eyða síðunni.

8.13.8 Flytja inn/út síður

Sjá hluta 12.3 Síðubúnt.

8.14 Skannaðir hópar

Skannaður hópur er svæði sem inniheldur hnappa sem skanna sem stök eining. Þegar skannaður hópur er valinn eru hnapparnir innan þess svæðis skannaðir. Með því að nota skannaða hópa er mun fljótlegra að nota skönnunaraðgangsaðferðina.

Til að nota skannaða hópa verður Skönnunaraðgangsaðferðin að vera virk með Hópskönnunarstillinguna virka. Fyrir frekari upplýsingar, sjá kafla 13.13.7 Skönnunar valmöguleikar.

Búa til og breyta skönnuðum hópum



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflípann**.
3. Veldu **Skannaðir hópar** verkfærið.
Fyrsti skannaði hópurinn er búinn til fyrir þig sjálfvikt.

4. Til að bæta svæðum við skannaða hópinn þinn skaltu velja  **Teikniverkfærið**, smella síðan á (eða smella og draga yfir) svæði á síðu til að bæta þeim við skannaða hópinn. Svæðin geta verið hvar sem er á síðunni, þau þurfa ekki að snertast.



Skýringarmynd 8.20 Að bæta við skannaðan hóp með teikniverkfærinu.



Þú getur ekki bætt skilaboðaslá eða tækjastiku við skannaðan hóp. Það er vegna þess að skilaboðaslá og tækjastika eru alltaf þeirra eigin skannaði hópur.

5. Til að fjarlægja svæði úr skönnuðum hópi skal velja  **Eyða** verkfærið og smella síðan á hvert það svæði sem þú vilt fjarlægja úr hópnum.



Notaðu **Fletta upp** og **Fletta niður** örvar til að fletta á síðunni.



Skannaðir hópar eru skilgreindir sem svæði á síðu, ekki ákveðnir hnappar. Ef þú flytur hnapp gæti hann verið í öðrum skönnuðum hópi í nýju stöðunni.

Skönnunarröðin fylgir vinstri til hægri, upp og niður framgangi. Númer skönnuðu hópanna tengjast ekki skönnunarröðinni.

Hnappar á síðunni sem ekki eru í skönnuðum hópi verða skannaðir hver fyrir sig.

Skannaðir hópar fara eftir rúðustærð.

6. Til að búa til nýjan skannaðan hóp skal velja  hnapp í neðra vinstra horninu.
7. Til að fara á milli skannaðra hópa skal velja litaða hringinn sem passar við lit skannaða hópsins sem þú vilt breyta.



8. Til að eyða skönnuðum hópi skal fyrst velja skannaða hópinn eins og lýst er í ofangreindu skrefi og velja síðan



Eyða skönnuðum hópi.

8.14.1 Valkostir skannaðs hóps

Litur skannaðs hóps



- Veldu litaverkfærið til að velja lit fyrir núverandi skannaðan hóp. Litir skannaða hópsins birtist eingöngu í breytingarham en ekki í notkunarham.

Hljóðmerki skannaðs hóps

- Texti sem sleginn er inn í hljóðmerkisreitinn verður lesinn þegar hópurinn er skannaður (ef Lesa hljóðmerki er virkt).



- Ef þú vilt taka upp sérsniðna hljóðmerkisupptöku, sjá kafla 8.6.3.2 *Taka upp*.

Dvelja í hópi

- Þegar hann er virkjaður mun skanninn endurræsast innan skannaða hópsins eftir að valið hefur verið. Þetta gerir notendum kleift að framkvæma fjölval innan eins hóps. Þegar Dvelja í hópi er gert óvirkt endurræsist skönnunarröðin eftir á síðu eftir að valið hefur verið.

8.15 Breyta skilaboðaslá

Breytingar á skilaboðaslánni eiga við allt síðusettið.

8.15.1 Færðu til og breyttu stærð hluta í skilaboðaslá



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hlutinn á skilaboðaslánni sem þú vilt breyta um stærð (hnapp eða skilaboðaglugga).
3. Til að breyta stærð hlutarins, veldu og haltu niðri á einum af bláu punktum í horninu á hlutnum og dragðu síðan að viðkomandi stærð.
Til að færa hlutinn, veldu og haltu inni í miðju hlutarins og dragðu síðan til vinstri eða hægri í skilaboðaslánni.




Skilaboðagluggann er einungis hægt að stækka inn í tóm hólfi.

8.15.2 Bæta við hnöppum í skilaboðaslánni



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu tóman reit í skilaboðaslánni.
Ef það eru engir tómir reitir í skilaboðaslánni þá hefurðu þrjá möguleika:
 - Að minnka skilaboðagluggann. Sjá hluta 8.15.1 *Færðu til og breyttu stærð hluta í skilaboðaslá*.
 - Eyða einum eða fleiri hnöppum í skilaboðaslánni. Sjá hluta 8.15.3 *Fjarlægja hnappa úr skilaboðaslá*.
 - Stækka rúðustærð. Sjá hluta 9.2 *Rúðustærð*.

3. Veldu hnapp úr valmyndinni og bættu honum við skilaboðaslánna. Til að læra meira um skilaboðasláhnappana, sjá hluta 6 *Skilaboðaslá*.

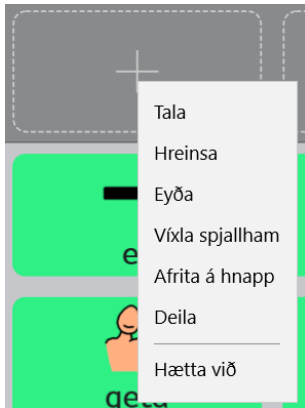

Skýringarmynd 8.21 Skilaboðaslá hnappavalmynd

8.15.3 Fjarlægja hnappa úr skilaboðaslá

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp í skilaboðaslá.
3. Veldu  **Eyða**.

 Ekki er hægt að eyða skilaboðaglugganum.

8.15.4 Búa til skilaboðaglugga á síðunni

Þú getur valið að fela skilaboðaslánna og birta skilaboðagluggann á síðunni í staðinn. Sjá hluta 8.10 *Búa til skilaboðaglugga á síðunni*.

8.16 Breyta verkfærastiku



Skýringarmynd 8.22 Core First verkfærastikan, séð í breytingaham, með hnappa, falda hnappa og tomt hólfi.

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hvaða hnapp sem er á verkfærastikunni til að breyta honum.
Þú gætir þurft að skruna til að sjá allt efni verkfærastikunnar eða til að fá aðgang að tónum hólfa á verkfærastikunni.
3. Smelltu og haltu niðri, dragðu síðan hnappana til að endurraða hnöppunum innan verkfærastikunnar.



Þú getur ekki dregið hnappa á milli síðunnar og verkfærastikunnar.

8.17 Sérnsniðnir litir

Þú getur búið til, breytt og vistað sérnsniðna liti úr hvaða litavalmynd sem er í Snap.

1. Í breytingarham, veldu hlutinn sem þú vilt breyta litnum á.



Til að beita litabreytingum á hluti í gegnum síðusettið, veldu **Síðusett** flippann.

2. Veldu **Stíll**.
3. Veldu frumlitinn sem þú vilt breyta (rammi, bakgrunnur, texti o.s.frv.)
4. Veldu  breyta lit hnappinn.
5. Veldu **Vista** til að vista nýju litabreytinguna þína. Veldu **Hætta við** til að fara til baka án þess að vista.

6. Vistaðir sérsniðnir litir eru fáanlegir efst í litavalmyndinni í hvert skipti sem þú opnar litavalmyndina.

Til að eyða sérsniðnum lit, veldu litinn og veldu síðan  Eyða.

9 Stillingar síðusetts

9.1 Síðusettt

9.1.1 Veldu síðusettt



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusettt** flipann.
3. Veldu röð undir **Síðusettt notandanafns**.
4. Veldu síðusettt úr listanum.

9.1.2 Búa til nýtt síðusettt

Búa til síðusettt úr foruppsettum, afritum af síðusettti notanda sem er til, eða staðbundinni skrá



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusettt** flipann.
3. Veldu röð undir **Síðusettt notandanafns**.
4. Veldu **Búa til síðusettt**.
Veldu síðusettt svar opnast.
5. Veldu síðusettt:

Foruppsett síðusettt

- **Core First** síðusettt inniheldur Core First efni.
- Veldu **Tómt** síðusettt til að byrja frá grunni með tómu forsniði.

Síðusettt notanda

- Veldu eitt af síðusetttum þínum sem er til nú þegar til að nota sem forsnið (búa til afrit).

Staðbundnar skrár

- Flytja inn síðusettskrá (.sps) sem er geymt á staðbundnu tæki eða tengdu drifi.
6. Veldu **Næst** til að búa til nýtt síðusettt.
 7. Settu inn heiti fyrir nýja síðusetttið.
 8. Veldu **Búa til** til að búa til síðusettt. Veldu **Hætta við** til að fara aftur í stillingar síðusetts án þess að búa til nýtt síðusettt.

Ná í síðusettt frá myTobiiDynavox



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusettt** flipann.
3. Veldu núverandi síðusettt.
4. Veldu **Hlaða niður síðusettti**.



Þú gætir verið beðin/n um að skrá þig inn á TobiiDynavox.

5. Veldu síðusettt úr listanum, veldu síðan **Niðurhal**.
6. Þegar niðurhali er lokið skaltu setja inn heiti fyrir síðusetttið, veldu síðan **Save**.

9.1.3 Endurnefna síðusettt og breyta lýsingu

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusettt** flipann.
3. Í lista yfir síðusettt notanda velurðu  **Breyta** hnappinn við hliðina á heiti síðusettsins sem þú vilt endurnefna. Breyta síðusettsupplýsingum svar opnast.
4. Breyttu textanum í **Heiti** reitnum og/eða **Lýsing** reitinn.
5. Veldu **Vista** til að vista breytingar. Veldu **Hætta við** til að fara aftur í lista yfir síðusettt án þess að vista.

9.1.4 Eyða síðusettti

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusettt** flipann.
3. Í lista yfir síðusettt notanda velurðu  **Eyða** hnappinn við hliðina á heiti síðusettsins sem þú vilt eyða.
 Þú getur ekki eytt síðusettti sem er verið að nota.
4. Veldu rauða **Eyða** hnappinn.
5. Veldu **Eyða** til að fjarlægja síðusetttið varanlega. Veldu **Hætta við** til að fara aftur í lista yfir síðusettt án þess að eyða.

9.1.5 Stilla heimasíðu

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
 2. Velja **Síðusettt** flipann.
 3. Velja **Heimasíða**.
 4. Veldu síðu úr listanum.
-  Sláðu inn í leitarreitinn til að finna tiltekna síðu eða veldu nýlega opnað til að finna síðu sem þú heimsóttir nýlega.
- Ráðlögð heimasíða fyrir rúðustærð 1x1 upp í 2x3 er studd leiðsögn. Fyrir rúðustærðir 3x3 og stærri er stungið upp á kjarnaorðum sem heimasíðu.

9.1.6 Stilla inn lyklaborðssíðu

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
 2. Velja **Síðusettt** flipann.
 3. Veldu **Síða lyklaborðs**.
 4. Veldu síðu úr listanum.
-  Sláðu inn í leitarreitinn til að finna tiltekna síðu eða veldu nýlega opnað til að finna síðu sem þú heimsóttir nýlega.
- Notaðu leitarhugtakið „lyklaborð“ til að þrengja leitarniðurstöður við lyklaborðssíður.

9.2 Rúðustærð

Valin rúðustærð í stillingum síðusetts er sjálfvalin rúðustærð fyrir notandann. Allar síður verða með sjálfvaldar rúðustærðir í stillingum síðusetts nema annað sé tiltekið í stillingum síðu.

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu **Rúðustærð** flokkur.
4. Veldu rúðustærð úr lista yfir fyrirfram tilbúna rúðustærðir eða veldu fjölda raða og dálka til að búa til sérsniðna rúðustærð.




Ef þú ert ekki að búa til algjörlega sérsniðna síðu er þér eindregið ráðlagt að nota fyrirfram tilbúna rúðustærðir síðusettsins. Fyrirfram tilbúna rúðustærðir munu sýna forútfyllt síðuefnið eins og það er hannað af sérfræðiteymi okkar, en aðrar rúðustærðir gera það ef til vill ekki.



Ef þú vilt sýna skilaboðaslánna og/eða verkfærastiku verður þú að velja rúðustærð 3x3 eða stærri. Til að breyta stærð bila á milli hnappa, sjá kafla 9.3.6 *Rúðujaðar síðusetts*.


Tafla 9.1 Dæmi um rúðustærðir (ekki ítarlegt)

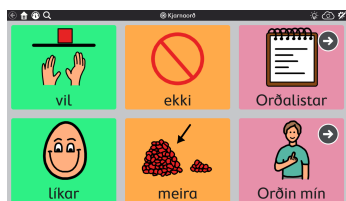

2x3



3x4

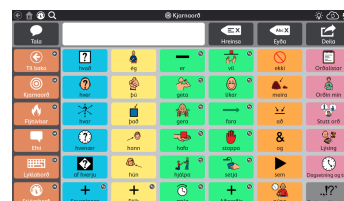

6x6

9.3 Stíll síðusetts

Stillingar sem gerðar eru í stíl síðusetts skilgreina útlit síðusettsins. Allar síður í síðusettinu, þ.m.t. nýjar síður, munu nota þessar stíllstillingar nema þær séu hunsaðar handvirkir á síðu- eða hnappastigi.

9.3.1 Leturgerð merki hnappa síðusetts

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Leturgerð** undir stíll.
5. Veldu leturgerð.

9.3.2 Stærð leturgerðar merki hnappa síðusetts

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Leturgerð** undir stíll.
5. Veldu stærð leturgerðar.

9.3.3 Feitletruð merki hnappa síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Feitletrað** undir stíll.
5. Kveiktu eða slökktu á feitletrun.

9.3.4 Uppsetning hnappa síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Uppsetning hnappa** undir stíll.
5. Veldu uppsetningu úr listanum.




Merki efst, mynd neðst




Merki neðst, mynd efst




Merki vinstri, mynd hægri

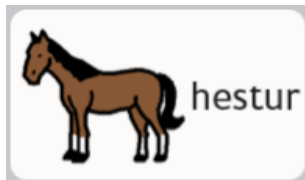

Merki hægri, mynd vinstri

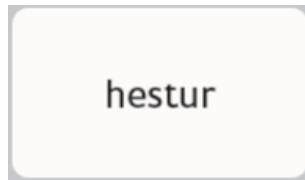

Aðeins merki

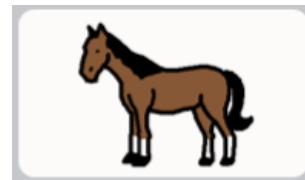

Aðeins mynd

9.3.5 Útlit tengla síðusetts

Stilltu inn útlit hnappa sem fara á aðrar síður.



Útlitsstíll tengils — enginn



Útlitsstíll tengils — Yfirlitstákn



Útlitsstíll tengils — Möppur

- **Ekkert** — passa við sjálfvalin stíl hnappa síðusetts.
- **Yfirlitstákn** — lítið tákn birtist í horni hnappsins sem sýnir hvað hann gerir (tengill á aðra síðu, heimsækja síðu, eða fara til baka)
- **Möppur fyrir tengla** — Tenglahnappar eru í laginu eins og möppur. (Stíll á aðeins við um tenglahnappa, ekki fara til baka eða heimsækja hnappa).

9.3.6 Rúðujaðar síðusetts

Stilltu inn stærð bilanna á milli hnappa.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðuset** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Rúðujaðarstuðull** undir rúðujaðri.
5. Veldu stærð rúðujaðarstuðuls.

9.3.7 Sjálfvaldir bakgrunnslitir síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðuset** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu hverja sem er af eftirfarandi röðum til að breyta tilteknum bakgrunnslit:
 - **Bakgrunnur síðu** — Sjálfvalinn litur fyrir bakgrunn síðunnar.
 - **Bakgrunnur tækjastíku** — Sjálfvalinn litur fyrir bakgrunn síðunnar.
 - **Bakgrunnur skilaboðasláar** — Sjálfvalinn litur fyrir bakgrunn skilaboðaslárinnar (ekki skilaboðagluggann).



Þú getur búið til þína eigin sérsniðnu liti! Sjá hluta 8.17 *Sérsniðnir litir*.

9.3.8 Leturgerð skilaboðaglugga síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðuset** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Leturgerð** undir skilaboðaglugga.
5. Veldu leturgerð.

9.3.9 Stærð leturgerðar skilaboðaglugga síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðuset** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Stærð leturgerðar** undir skilaboðaglugga.
5. Veldu stærð leturgerðar.

9.3.10 Litur texta skilaboðaglugga síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðuset** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Litur texta** undir skilaboðaglugga.
5. Veldu lit texta



Þú getur búið til þína eigin sérsniðnu liti! Sjá hluta 8.17 *Sérsniðnir litir*.

9.3.11 Bakgrunnslitur texta skilaboðaglugga síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Bakgrunnur** undir skilaboðaglugga.
5. Veldu lit.



Þú getur búið til þína eigin sérsniðnu liti! Sjá hluta 8.17 *Sérsniðnir litir*.

9.3.12 Auðkennislitur texta skilaboðaglugga síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Auðkennislitur texta** undir skilaboðaglugga.
5. Veldu lit.



Þú getur búið til þína eigin sérsniðnu liti! Sjá hluta 8.17 *Sérsniðnir litir*.

9.3.13 Bakgrunnslitur texta skilaboðaslár síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu **Stíll** flokkinn.
4. Veldu **Bakgrunnur skilaboðaslár** undir skilaboðaglugga.
5. Veldu lit.



Þú getur búið til þína eigin sérsniðnu liti! Sjá hluta 8.17 *Sérsniðnir litir*.

9.4 Kjörstillingar síðusetts



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu **Kjörstillingar**.
4. Veldu hvað sem er af eftirfarandi til að breyta tilteknum stillingum:

Viðmót

- **Kveikt á skilaboðaslá** — Þegar virkjað er sjálfvalið að skilaboðasláin er sýnd á hverri síðu.
- **Staðsetning verkfærastiku** — Veldu að sýna verkfærastiku vinstra eða hægra megin á hverri síðu eða slökktu á henni í verkfærastikunni.

Verkfærastikuraðir

- **Samsvörunarstillingar síðusetts:** — Þegar þetta er gert virkt verður fjöldi raða sem tiltækar eru á tækjastikunni sá sami og fjöldi raða í valda síðusettinu.

Til að breyta fjölda raða í tækjastikunni óháð rúðustærð síðusettsins skal gera þessa stillingu óvirka og stilla fjölda raða sem óskað er eftir.

Síðusett skannaðra hópa

- **1. xxx, 2. yyy, 3. zzz** — Stilltu fyrirmælin á því hvernig skanna á síðusettsskönnunarhópana; Síðu, tækjastiku og skilaboðaslá.
Stilltu stillingar fyrir skönnunarfyrirmæli, hljóðmerki og dvöl í hópi fyrir síðusettsskönnunarhópana; Síðu, tækjastiku og skilaboðaslá.

9.5 Aðlögunarhnappar



Þessi hluti á aðeins við um Tobii Dynavox I-13 og I-16 tæki.

Aðlögunarhnappar sem er að finna framan á Tobii Dynavox I-13 og I-16 tækjunum má velja með snertingu eða augnstýringu. Tvo þessara hnappa  og  hnappana má forrita með Snap Core First aðgerðum sem eru framkvæmdar ef þeir eru valdir með Gaze Interaction á meðan Snap Core First er notað.

Stilla inn Gaze Interaction aðgerðir aðlögunarhnappa



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Velja **Aðlögunarhnappar**.
4. Veldu  eða  úr listanum.
5. Veldu **Bæta við aðgerð**.
6. Veldu aðgerð.



Til að bæta við fleiri aðgerðum endurtekurðu skref 5 og 6.

Stilla inn snertiaðgerðir aðlögunarhnappa



Hegðun aðlögunarhnappa er stillt inn í Tobii Dynavox vélbúnaðarstillinga forritinu. Þú getur ræst þetta forrit beint með flýtleið sem má finna á skjáborðinu eða í gegnum Snap Core First eins og lýst er að neðan.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Velja **Aðlögunarhnappar**.
4. Veldu **Sjá aðgerðir fyrir snertingu**. Tobii Dynavox vélbúnaðarstillingaforritið ræsist.
5. Notaðu fellivalmyndirnar í vélbúnaðarstillingaforritinu til að velja aðgerðirnar fyrir aðlögunarhnappana þegar þeir eru valdir með snertingu.

9.6 Um síðusett

Þessi kafli sýnir númer útgáfu síðusettsins og stillingar efnishönnuðar.

9.6.1 Stillingar efnishönnuða síðusetts

Sérstakar stillingar fyrir háþróaðri síðusettsskapara.

9.6.1.1 Stilla inn hámarkaða rúðustærð

Stilltu inn hvaða rúðustærðir birtast í lista yfir hámarkaðar rúðustærðir fyrir þetta síðuset.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðuset** flipann.
3. Veldu **Um**.
4. Veldu **Efnishönnuða stillingar**.
5. Veldu **Rúðustærðir**.
6. Til að bæta rúðustærð við listann skaltu skrúna til hægri og velja **Bæta við nýrri stærð**. Bæta við hámarkaðri rúðustærð svarið birtist.
7. Veldu fjölda **Raðir** og **Dálkar** fyrir nýja hámrörkuðu rúðustærðina (allt að 15 x 15), veldu síðan **Vista**.
8. Til að fjarlægja hámarkaða rúðustærð veldu **Eyða** táknid á rúðustærðinni í listanum. Eyða rúðustærð viðvörun birtist. Ef þú ert viss um að þú viljir eyða rúðustærð, velurðu **Eyða**. Annars velurðu **Hætta við** til að loka viðvöruninni án þess að eyða.

9.6.1.2 Málareglur síðusetts

Stillingar málareglna síðusetts stilla sjálfvirkar málareglur fyrir hnappa og síður í síðusettinu. Stillingar tungumálareglna stjórna tungumálinu sem verður notað fyrir táknaleit, táknmyndun, orðaspá, beygingu, sjálfvirka bræðingu og talrödd (ef tungumála-sértæk rödd er stillt inn fyrir tungumálið).

Hnappar erfa sjálfvaldar stillingar tungumálareglna frá stillingum á síðusettssplani eða stillingum síðusetts. Þegar þú stillir inn málareglur síðusetts taka allir hnappar sem eru í síðusettinu þá stillingu og nýir hnappar sem gerðir eru í síðusettinu verða líka sjálfkrafa með þá stillingu. Til að breyta málareglum fyrir tiltekna síður í síðusettinu, sjá kafla 8.13.3 *Málareglur síðu*. Til að breyta málareglum fyrir tiltekna hnappa, sjá kafla 8.11 *Málareglur hnapps*.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðuset** flipann.
3. Veldu **Um**.
4. Veldu **Efnishönnuða stillingar**.
5. Veldu **Málareglur**.
6. Veldu tungumál úr listanum:
 - a. **Tungumál sem eru studd að fullu** — hefur áhrif á tungumálaleit, táknmyndun, orðaspá, beygingu, sjálfvirka bræðingu og talrödd (ef tungumála-sértæk rödd hefur verið stillt inn fyrir tungumálið).
 - b. **Önnur tungumál** — tungumálin í þessum flokki hafa breytilegt stuðningsstig innan Snap Core First forritsins.

10 Prenta

Prentaðu eina eða fleiri síður á pappír eða á PDF.

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflipann**.
3. Veldu  **Prenta** í tækjastikunni hægra megin á skjánum. Veldu síður til að prenta svar opnast.

 Þú getur einnig prentað frá **Prenta síður** svæðinu í síðuflipanum.


4. Núverandi síðu er bætt við prentunarröðina sjálfkrafa. Veldu fleiri síður úr listanum til að bæta þeim við prentunarröðina.
Sláðu inn í leitarreitinn til að leita að heiti síðu.

Til að bæta öllum síðunum úr núverandi leitarniðurstöðum í prentunarröðina, veldu **Velja allt**.

 Ef þú velur Velja allt og afhakar síðan Velja allt mun prentunarröðin endurstillast.

Til að fjarlægja síður úr prentunarröðinni veldu **X**við hliðina á heiti síðu.

Þegar búið að velja síður fyrir prentunarröðina veldu **Næst**.

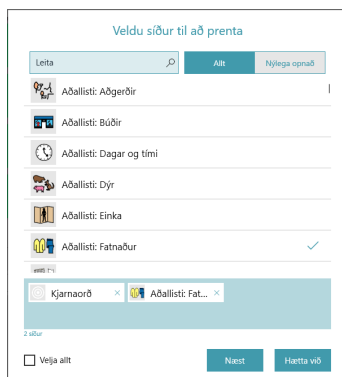


5. Veldu þína prentarastillingar. Síðu forskoðun uppfærir til að sýna núverandi stillingar.



- Skilaboðaslá — Aftengdu þessar stillingar til að fela skilaboðaslána á prentuðu síðunni/síðunum.
- Tækjastika — Aftengdu þessar stillingar til að fela tækjastikuna á prentuðu síðunni/síðunum.
- Sýnileiki tengils — Aftengdu þessar stillingar til að fela tenglavísatákn á tenglahnöppum á prentuðu síðunni/síðunum.

- Begar þú hefur lokið að velja þínar prentarastillingar veldu **Prenta**.

- Begar þú hefur lokið við að fínstilla prentarastillingarnar þínar, veldu **Prenta**.

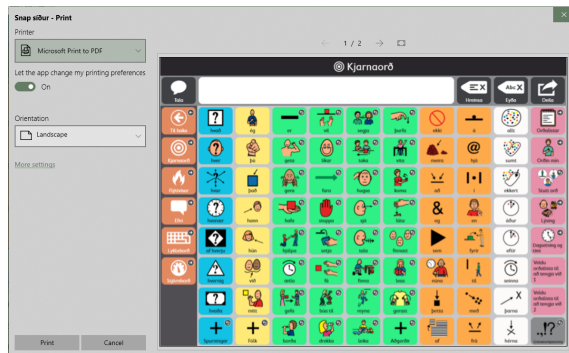

11 Google aðstoð

Uppgötvaðu kosti þess að hafa snjallaðstoð þökk sé samþættingu Google Assistant í Snap Core First. Fáðu strax aðgang að upplýsingum, skemmtun, umhverfisstjórnun og meira beint í gegnum hugbúnaðinn.



Frábending: Snap Core First, Google Assistant og öll tengd snjalltæki ættu aldrei að vera eina samskiptaleiðin fyrir notandann til að tjá mikilvægar upplýsingar.



Snap Core First, Google Assistant og öll tengd snjalltæki eða hátalarar á ekki að nota sem lífshjálparbúnað eða í öðrum mikilvægum tilgangi og skal ekki treysta á þau ef ske kynni að virkni minnkaði vegna orkutaps eða af öðrum orsökum.



Tobii Dynavox tekur enga ábyrgð á háttsemi notanda og hafnar allri ábyrgð vegna tjóns/eða skaða (þ.m.t en er ekki takmarkað við eignatjón, meiðsl og andlát) í tengslum við notkun á Snap Core First, Google Assistant, snjalltæki, hátalara eða einhver samsetning þeirra.



Ef einhver annar búnaður utan við Google hátalara er notaður, verður þú að hafa opið samskiptatæki. Fyrir aðstoð við að opna tækið hafðu þá samband við tækniðstoð Tobii Dynavox.

11.1 Tengdu Google aðganginn þinn

Til að nota Google Assistant, snjallhátalara og snjalltæki verður þú fyrst að skrá þig inn á Google aðganginn þinn í Snap Core First. Sjá hluta 13.11 *Google aðgangur*.

11.2 Setja upp Google tækið þitt.

Farðu eftir leiðbeiningunum sem fylgdu tækinu þínu til að klára að setja það upp áður það er notað með Snap Core First.

11.3 Tungumálastuðningur Google Assistant

Það er mikilvægt að þú setjir upp Google Assistant með sama tungumáli og er talað við notkun á Snap Core First.



Áður en þú breytir tungumáli á Google Assistant skaltu athuga að farsíminn þinn og spjaldtölva séu tengd sama þráðlausa neti eða tengt sama reikning og Google Nest, Google Home hátalarinn þinn eða önnur tæki sem geta tengst Google Assistant.

Til að breyta tungumálinu fyrir Google Assistant:

1. Í farsímanum þínum, opnaðu **Google Home** eða **Google Assistant** forritið.
2. Efst til hægri, veldu reikninginn þinn > **Assistant stillingar**.
3. Veldu **Assistant > Tungumál**.
4. Veldu núverandi tungumál þitt.
5. Veldu nýtt tungumál.

Til að bæta við öðru tungumáli fyrir Assistant:

1. Í farsímanum þínum, opnaðu **Google Home** eða **Google Assistant** forritið.
2. Efst til hægri, veldu reikninginn þinn > **Assistant stillingar**.
3. Veldu **Assistant > Tungumál > Bæta við tungumáli**.
4. Veldu annað tungumál.



Þú getur tala við Google Assistant á hvoru tungumálinu en ekki blanda saman báðum tungumálunum í sama orðalagi.

11.4 Tala við Google Assistant

Við hvetjum við þig að byrja á Core First Google Assistant síðunum okkar*. Þær má finna á stjórnborðinu á núverandi Core First síðusettingu, þú getur líka hlaðið niður síðunum og flutt inn af mytobiidynavox.com/PagesetCentral. Google Assistant síðan inniheldur hnappa til að finna upplýsingar með Google Assistant, spila tónlist og leiki, hringja símtöl, heimilisstjórnun og fleira. Fyrir ítarlega aðstoð við Core First Google Assistant síðurnar og að tala við Google Assistant í gegnum Snap, sjá byrjunarleiðbeiningarnar [Að nota Google Assistant með Snap Core First](#).

*Google Assistant og Core First Google Assistant síðurnar eru ekki fáanlegar á öllum svæðum og tungumálum.

Til að búa til þína eigin Google Assistant hnappa, sjá fyrir neðan.



Til nota Google Assistant verður þú að hafa nettengingu og vera skráður inn á Google reikninginn þinn í Snap og öllum Google Assistant tengdum tækjum sem þú ætlar að nota.

Þú munt senda Google Assistant skipanir á aðeins mismunandi hátt, það er háð búnaði þínum. Vertu viss um að fylgja leiðbeiningunum fyrir tækið sem þú ert að nota. Skoðaðu táknin fyrir neðan til að finna skrefin sem eiga við þig.	
	Eingöngu Google Assistant aðgangur, engin viðbótábúnaður.
	Google Nest Mini eða aðrir Google hátalarar.



Búðu til hnapp sem sendir fyrirfram forritaða Google Assistant skipun í Google hátalara.

Þessi valkostur hentar best fyrir Google Assistant skipanir sem verða notaðar oftar en einu sinni.

1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Í skilaboðareitnum, skrifaðu skipunina sem þú vilt senda til Google Assistant.



Skilaboðin verða að byrja á „Ok Google“, síðan spurningin eða skipunin.

4. Í aðgerðarhlutanum, veldu aðgerðina **tala eða setja inn skilaboð**.
5. Veldu **Alltaf tala**.



Til að senda sérstakar Google Assistant skipanir á ferðinni, fylgdu skrefunum hér að ofan til að búa til hnapp sem inniheldur eingöngu skilaboðin „Ok Google“, í notkunarham, semdu Google Assistant skipunina í skilaboðaglugganum, veldu Ok Google hnappinn og segðu síðan skilaboðagluggann til að senda skipunina.



Búðu til hnapp sem sendir skilaboðatexta hnappsins til Google Assistant á tækinu þínu.

Þessi valkostur hentar best fyrir Google Assistant skipanir sem verða notaðar oftar en einu sinni.

1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu hnapp.
3. Í skilaboðareitnum, skrifaðu skipunina sem þú vilt senda til Google Assistant.



Ekki skrifa „Ok Google“, á undan spurningunni eða skipuninni.

4. Veldu **Bæta við aðgerð**.
5. Skrunaðu niður að umhverfisstjórnunarhlutanum og veldu **Senda Google Assistant skipun**.
6. Veldu **Senda skilaboðatexta hnapps til Google Assistant**.



Búðu til hnapp sem sendir texta skilaboðagluggans til Google Assistant á tækinu þínu.

Þessi tegund hnapps leyfir notandanum að semja sérstakar Google Assistant skipanir í skilaboðaglugganum og senda þær síðan til Google Assistant.



1. Veldu **Breyta hnappinn**.
2. Veldu hnapp.
3. Veldu **Bæta við aðgerð**.
4. Skrunaðu niður að umhverfisstjórnunarhlutanum og veldu **Senda Google Assistant skipun**.
5. Veldu **Senda texta skilaboðaglugga til Google Assistant**.



Ef þú færð ekki niðurstöðurnar sem þú gerðir ráð fyrir, prófaðu að orða á annan hátt. Til dæmis „Ok Google, kveiktu ljósin“ kveikti ekki á snjallperunni. Hins vegar, „Ok Google, kveiktu ljósin í stofunni“ kveikti á snjallljósinu af því það hafði verið sett upp í stofunni í Google Home forritinu.

Fyrir fleiri hugmyndir um hvernig þú getur notað Google Assistant með Snap Core First sjá byrjunarleiðbeiningarnar [Að nota Google Assistant með Snap Core First](#)

12 Deila og vista

Tobii Dynavox Snap Core First býður upp á þó nokkrar þægilegar leiðir til að deila og vista notendur þína, síðusett og síður. Hvort sem þú vilt halda öllum síðusettunum mótsagnalausum yfir öll tæki þín eða senda nýjar síður til vinar, erum við með leið til þess!

- **Flytja út/inn staðbundið** (Notandi, síðusett, síðubúnt) — Nota þegar skrá er geymd á staðbundinni vél, deilt á USB-drífi eða með fólki sem er ekki með myTobiiDynavox reikning.
- **Flytja út/inn í gegnum myTobiiDynavox*** (Síðusett, síðubúnt) — Deila síðusettum og síðubúntum með öðrum notendum myTobiiDynavox. Geymdu og fáðu einkaaðgang að skrá á þínum eigin myTobiiDynavox reikningi.
- **Samstill*** (Síðusett) — deildu yfirstandandi breytingum á síðusetti með öllum tækjunum þínum og með sérstökum myTobiiDynavox notendum. Síðusett sem deilt er með samstillingum geymir dagréttu útgáfu af síðusettinu í skýinu, þannig að breytingar sem gerðar eru á síðusettinu á hverju sem er af samþykktum tækjum/reikningum er deilt yfir öll samstillt tæki/reikninga fyrir síðusettið.

*Þessar deililaðferðir krefjast virkrar nettengingar.

Tafla 12.1 Skráargerðir fyrir deilingu og vistun — hvað innihalda þær

Skráargerð	Síður	Kjörstillingar síðu	Kjörstillingar síðusetts	Kjörstillingar notanda	Kjörstillingar kerfis
Notandi	Já	Já	Já	Já	Nei
Síðusett	Já	Já	Já	Nei	Nei
Síðubúnt	Já (Ákveðnar síður)	Já	Nei	Nei	Nei

12.1 Notendur

Öryggisafrit notanda innihalda síðusett og stillingar sem tengjast notandanum. Öryggisafrit notanda innihalda ekki raddir. Hinsvegar eru raddstillingar geymdar og valinni rödd verður sjálfkrafa hlaðið niður ef hún er ekki tiltæk á tækinu (nettengingar krafist).

12.1.1 Taka öryggisafrit af notanda

Sjá hluta 13.3 *Taka öryggisafrit af notanda*.

12.1.2 Endurheimta notanda

Sjá hluta 13.4 *Endurheimta notanda*.

12.2 Síðusett

Síðusettskrá inniheldur allar síður sem tengjast síðusettinu. Það inniheldur engar notendaupplýsingar eða stillingar á notkunarstigi.

12.2.1 Flytja inn síðusett

Frá myTobiiDynavox



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusett** flipann.
3. Veldu núverandi síðusett.
4. Veldu **Hlaða niður síðusetti**.



Þú gætir verið beðin/n um að skrá þig inn á TobiiDynavox.

5. Veldu síðusettt úr listanum, veldu síðan **Niðurhal**.
6. Þegar niðurhali er lokið skaltu setja inn heiti fyrir síðusettið, veldu síðan **Save**.

Frá staðbundinni skrá



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusettt** flipann.
3. Veldu núverandi síðusettt.
4. Veldu **Búa til síðusettt**.
5. Veldu **Staðbundnar skrár** flipann.
6. Veldu **Vafra**.
7. Farðu í óskaða .sps skrá, veldu hana og veldu síðan **Opna**.
8. Veldu **Næst**.
9. Settu inn einkvæmt heiti fyrir síðusettið, veldu síðan **Búa til**.

12.2.2 Vista afrit af síðusetti

12.2.2.1 Vista síðusettt hjá myTobiiDynavox

Síðusettskrá sem vistuð er hjá myTobiiDynavox má finna á myTobiiDynavox.com í Dótið mitt > Snap > síðusettt



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusettt** flipann.
3. Veldu núverandi síðusettt.
4. Veldu  **Vista** tákn við hlið síðusettsins sem þú vilt vista.
5. Veldu **Vista afrit í myTobiiDynavox**.



Þú gætir verið beðin/n um að skrá þig inn á TobiiDynavox.

6. Settu inn einkvæmt heiti fyrir síðusettið og (valfrjálst) lýsingu, veldu síðan **Vista**.
7. Stöðuslá sýnir vistunarframvindu. Þegar þessu er lokið velurðu **Búið**.

12.2.2.2 Vista síðusettt staðbundið



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusettt** flipann.
3. Veldu núverandi síðusettt.
4. Veldu  **Vista** tákn við hlið síðusettsins sem þú vilt vista.
5. Veldu **Vista afrit í staðbundna skrá**.
6. Settu inn einkvæmt heiti fyrir síðusettið og (valfrjálst) lýsingu, veldu síðan **Næst**.
7. Veldu **Vafra**. Farðu á skráasafnið þar sem þú vilt vista síðusetttsskránnu og veldu síðan **Vista**.
8. Veldu **Vista**.
9. Stöðuslá sýnir vistunarframvindu. Þegar þessu er lokið velurðu **Búið**.

12.2.3 Deila afriti af síðusetti (í gegnum myTobiiDynavox)



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Síðusettt** flipann.



3. Veldu **Deila síðusetti** tákn við hlið síðusettsins sem þú vilt deila.
4. Veldu **Deila afriti**.
5. Settu inn einkvæmt heiti fyrir síðusettið og (valfrjálst) lýsingu, veldu síðan **Næst**.
6. Settu inn myTobiiDynavox notandanafnið eða netfangsreikning þess sem þú sendir síðusettið til, síðan velurðu + Til að bæta þeim við lista móttakenda. Endurtaktu þetta ferli til að bæta við fleiri móttakendum. Þegar þú hefur bætt við öllum móttakendum, velurðu **Deila**.
7. Stöðuslá sýnir deilingarframvindu. Þegar þessu er lokið velurðu **Búið**.



Ef þú vilt vista afrit af síðusetti staðbundið (til að deila með USB-drifi, tölvupósti o.s.frv.), sjá kafla 12.2.2.2 *Vista síðusett staðbundið*.

12.2.4 Samstilli síðusett

Samstilling er auðveld leið til að viðhalda sömu útgáfu af síðusetti á mörgum tækjum. Samstilling vistar dagréttu útgáfu af síðusettinu í skýinu. Þegar þú ýtir á samstillingarhnappinn, sendir þú breytingarnar sem þú gerðir á síðusettinu á staðbundnu tæki og færð líka allar breytingar sem voru gerðar á öðrum (samstilltum) *. Þegar öll tæki hafa samstillst, eru þau öll með sömu útgáfu af síðusettinu.

Samstillingarhnappurinn í efstu slánni lætur þig vita þegar til er uppfærð útgáfa af síðusettinu eða þegar þú ert með staðbundnar breytingar til að vista í skýið.

*Samstilling styður ekki sameiningu breytinga frá mörgum tækjum á sömu síðunni í sömu samstillingu. Ef breytingar eru gerðar á sömu síðu á sama tíma frá mörgum tækjum, mun síðasta tækið sem samstillir uppfæra síðuna með sinni útgáfu. Fólkið sem tekur þátt í að breyta samstilltu síðusetti ætti að ræða um það sín á milli um hvaða síðu er verið að breyta og samstilli oft til að forðast samstillingarbreytingar á sömu síðu á sama tíma.



Þegar samstillt er yfir mörg tæki eða notendur, verða stillingar yfirlitsgerðar að vera eins hjá öllum tækjum/notendum sem verið er að samstilli. Sjá hluta 13.13 *Aðgangsaðferð*.

12.2.4.1 Samstilli síðusett hjá myTobiiDynavox

Þegar þú samstillir síðu hjá myTobiiDynavox, verður þú með afrit að síðusettinu geymt á myTobiiDynavox miðlaranum. Þú getur notað þetta sem fljótvirkt og auðvelt öryggisafritunarkerfi fyrir síðusett og ef þú ert með önnur tæki sem keyra Snap Core First getur þú samstillt síðusettin á þeim tækjum líka.

Stilling síðusetts á samstillingu



1. Veldu **Samstilli** hnappinn í efstu stiku. Þú gætir verið beðin/n um að setja inn myTobiiDynavox notandanafn og aðgangsorð.
2. Veldu **Samstilli**.
3. Þetta er komið! Síðusettið er núna samstillt við myTobiiDynavox reikning þinn.



Í hvert skipti sem þú breytir síðusettinu verður þú að velja samstillingarhnappinn í efstu stiku til að senda breytingarnar í skýið.

Samstilli síðusett á aukatækjum

Ef síðusett er þegar stillt á samstillingu á einhverju af tækjum þínum getur þú samstillt fleiri tæki með því að fylgja skrefunum hér að neðan á hverju tæki fyrir sig.



1. Veldu **Samstilli** hnappinn í efstu stiku. Þú gætir verið beðin/n um að setja inn myTobiiDynavox notandanafn og aðgangsorð.



2. Veldu **Hlaða niður síðusetti** tákn.
3. Veldu síðuna sem þú vilt flytja ná í og samstilli og veldu síðan **Niðurhal**.
4. Þegar niðurhali er lokið, veldu **Búið**.

Niðurhalaða samstillta síðusettið er sjálfkrafa stillt á að vera virkt síðusett.



Í hvert skipti sem þú breytir síðusettinu verður þú að velja samstillingarhnappinn í efstu stiku til að senda breytingarnar í skýið og gera uppfærða síðusettið tiltækt til samstillingar fyrir önnur tæki. Það er best að samstilla áður en þú gerir breytingar á síðusettinu og samstilla svo aftur um leið og breytingum er lokið.

12.2.4.2 Bjóða einhverjum að samstilla við síðusettið þitt

Þegar aðrir myTobiiDynavox notendur samstilla við síðusett þitt geta þeir gert breytingar á síðusettinu á tækjum sínum og samstillt þær breytingar við skýið. Næst þegar þú samstillir á tækinu þínu færðu þeirra breytingar. Eins þegar þú gerir breytingar á síðusettinu verða þessar breytingar tiltækar hinum notendunum sem þú hefur leyft að samstilla við síðusett þitt.

Samstilling getur ekki sameinað breytingar frá mörgum notendum sem hafa breytt sömu síðu á sama tíma. Í þeim tilvikum verður yfirritar síðasti notandi sem gerði breytingar síðuna með sinni útgáfu. Þú ættir að samstilla strax áður og eftir að þú gerir breytingar á síðusetti og láta aðra notendur sem samstilla við síðusettið vita til að forðast að breyta sömu síðunni á sama tíma.

Þú ættir aðeins að samstilla við fólk sem þú treystir til að gera viðeigandi breytingar á síðusettinu.



Í hvert skipti sem þú breytir síðusettinu verður þú að velja samstillingarhnappinn í efstu stiku til að senda breytingarnar í skýið og gera uppfærða síðusettið tiltækt til samstillingar fyrir önnur tæki eða notendur.



Það er best að samstilla áður en þú gerir breytingar á síðusettinu og samstilla svo aftur um leið og breytingum er lokið.



1. Veldu **Samstilla** hnappinn í efstu stiku. Þú gætir verið beðin/n um að setja inn myTobiiDynavox notandanafn og aðgangsorð.



2. Veldu **Deila síðusetti** tákn.
3. Settu inn myTobiiDynavox notandanafn eða netfang þess sem þú deilir síðusettinu með, síðan velurðu + til að bæta þeim við lista móttakenda. Endurtaktu þetta ferli til að bæta við fleiri móttakendum. Þegar þú hefur bætt við öllum móttakendum, velurðu **Deila**.
4. Þegar deilingarferlinu er lokið, veldu **Búið**. Móttakendur fá deilutilkynningu með tölvupósti og í Snap Core First forritinu.



Samstillingartilkynningar gætu tekið allt að klukkutíma að birtast eftir að boð hefur verið sent. Þú getur hvenær sem er athugað með tilkynningar með því að velja samstillingartáknið.

12.2.4.2.1 Afturkalla samstillingarleyfi

Þú getur fjarlægt notendur úr samstilltum síðusettum (sem þú átt) hvenær sem er.



1. Veldu **Samstilla** hnappinn í efstu stiku.



2. Veldu **Deila síðusetti** tákn.
3. Notendur með samstillingarleyfi fyrir núverandi síðusett eru taldir upp í bláa kassanum. Til að fjarlægja notanda velurðu **X** við hliðina á nafni/netfangi þeirra og velur síðan **Uppfæra**.
4. Veldu **Búið**.

12.2.4.3 Samstilla við síðusett í annarra eigu

Þegar einhver deilir með þér síðusetti til samstillingar sýnir samstillingartáknið í efstu stikunni tilkynningartákn . Fylgdu skrefunum hér að neðan til að samþykkja eða hafna boðinu

Samstillingartilkynningar gætu tekið allt að klukkutíma að birtast eftir að boð hefur verið sent.

Samþykkja samstillingarboð



1. Veldu **Samstill** hnappinn í efstu stiku.
2. Veldu  **Hlaða niður síðusetti** tákn.
3. Veldu **skoða síðuset** sem eru tiltæk á myTobiiDynavox reikningi þínum.
4. Veldu síðuna sem þú vilt flytja ná í og samstill og veldu síðan **Niðurhal**.
5. Þegar niðurhali er lokið, veldu **Búið**.

Hafna samstillingarboði



1. Veldu **Samstill** hnappinn í efstu stiku.
2. Veldu  **Hlaða niður síðusetti** tákn.
3. Veldu **skoða síðuset** sem eru tiltæk á myTobiiDynavox reikningi þínum.
4. Veldu síðusettið sem þú vilt hafna og veldu síðan  **Eyða** tákn.
5. Veldu **Hafna**.

12.2.4.4 Snúa samstilltu síðusetti aftur í áður vistaða útgáfu

Þú getur farið aftur í áður vistaða útgáfu af samstilltu síðusetti. Þessi eiginleiki er gagnlegur ef þú hefur gert breytingar á síðusetti sem þú vilt henda eða afturkalla.



1. Veldu **Samstill** hnappinn í efstu stiku.
2. Veldu **Vistaðar útgáfur**.
3. Finndu samstillingardagsetninguna sem þú vilt endurheimta í listanum og veldu síðan **Endurheimta**.

12.2.4.5 Rita yfir samstillt síðuset

Notaðu rita yfir til að tryggja að núverandi útgáfa þín af síðusettinu er sú útgáfa af síðusettinu sem er einnig geymd í skýinu (burtséð frá breytingum sem gætu hafa verið samstilltar frá öðrum notendum).



1. Veldu **Samstill** hnappinn í efstu stiku.
2. Veldu **Ítarlegt**.
3. Veldu **Skrifa yfir**.

12.2.4.6 Sækja eingöngu samstilling

Þegar þú samstillir í sækja eingöngu ham færðu breytingar á síðusetti (sem gerðar eru á öðrum tækjum) en sendir engar breytingar á síðusettinu sem gerðar voru á núverandi tæki. Til að nota sækja eingöngu ham verður aðgangur að breytingarham að vera takmarkaður með aðgangskóða. Til að setja upp aðgangskóða og sækja eingöngu ham, sjá kafla **14.1.1 Aðgangskóði**.

12.3 Síðubúnt

Þú getur deilt undirsetti af síðusetti þínu (ein eða fleiri síður að þínu vali) sem síðubúnti. Síðubúnt innihalda aðeins tiltekna síður. Ef síðurnar innihalda hnappa með tengla á síður sem eru ekki til á tæki viðtakanda gera tenglarnir ekki neitt.

12.3.1 Flytja út síðubúnt

12.3.1.1 Flyttu síðubúnt út til myTobiiDynavox



1. Veldu **Breyta** hnappinn.

2. Velja **síðuflípann**.
3. Veldu **Flytja inn/út síður**.
4. Veldu **Flytja út síðubúnt**.
5. Veldu **Í myTobiiDynavox**.
6. Veldu síðurnar sem þú vilt hafa með í síðubúntinu. Valdar síður sýna gátmerki í listanum og birtast í bláu boxi.



Núverandi síða er sjálfkrafa innifalin í síðubúntinu. Til að fjarlægja hana eða nokkra aðra síðu í síðubúntinu velurðu X við hliðina á heiti síðunnar í bláu boxinu.

7. Þegar þú hefur bætt viðeigandi síðum við síðubúntið, skaltu velja **Næst**. Gefðu síðubúntinu heiti svar opnast.
8. Settu inn heiti fyrir síðubúntið í heitireit og (valfrjálst) lýstu síðunum í lýsingarreitnum.
9. Veldu **Flytja út** til að vista síðubúntið hjá myTobiiDynavox.
10. Þegar útflytningi er lokið, veldu **Búið**.

12.3.1.2 Flyttu út síðubúnt í staðbundna skrá



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflípann**.
3. Veldu **Flytja inn/út síður**.
4. Veldu **Flytja út síðubúnt**.
5. Veldu **Í staðbundna skrá**.
6. Veldu síðurnar sem þú vilt hafa með í síðubúntinu. Valdar síður sýna gátmerki í listanum og birtast í bláu boxi.



Núverandi síða er sjálfkrafa innifalin í síðubúntinu. Til að fjarlægja hana eða nokkra aðra síðu í síðubúntinu velurðu X við hliðina á heiti síðunnar í bláu boxinu.

7. Þegar þú hefur bætt viðeigandi síðum við síðubúntið, skaltu velja **Næst**. Gefðu síðubúntinu heiti svar opnast.
8. Settu inn heiti fyrir síðubúntið í heitireit og (valfrjálst) lýstu síðunum í lýsingarreitnum.
9. (Aðeins Windows) Veldu **Næst**.
10. (Aðeins Windows) Veldu **Vafra**. Farðu á skráasafnið þar sem þú vilt vista síðusettskránnar og veldu síðan **Vista**.
11. Veldu **Flytja út**.
12. Þegar útflytningi er lokið, veldu **Búið**.

12.3.1.3 Flytja út síðubúnt til deilingar (í gegnum myTobiiDynavox)



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflípann**.
3. Veldu **Flytja inn/út síður**.
4. Veldu **Flytja út síðubúnt**.
5. Veldu **Fyrir deilingu**.
6. Veldu síðurnar sem þú vilt hafa með í síðubúntinu. Valdar síður sýna gátmerki í listanum og birtast í bláu boxi.



Núverandi síða er sjálfkrafa innifalin í síðubúntinu. Til að fjarlægja hana eða nokkra aðra síðu í síðubúntinu velurðu X við hliðina á heiti síðunnar í bláu boxinu.

7. Þegar þú hefur bætt viðeigandi síðum við síðubúntið, skaltu velja **Næst**. Gefðu síðubúntinu heiti svar opnast.
8. Settu inn heiti fyrir síðubúntið í heitireit og (valfrjálst) lýstu síðunum í lýsingarreitnum.
9. Veldu **Næst**. Deila síðubúnti svar opnast.
10. Settu inn myTobiiDynavox notandanafnið eða netfangsreikning þess sem þú sendir síðusettið til, síðan velurðu + Til að bæta þeim við lista móttakenda. Endurtaktu þetta ferli til að bæta við fleiri móttakendum. Þegar þú hefur bætt við öllum móttakendum, velurðu **Deila**.
11. Þegar útflytningi er lokið, veldu **Búið**.



Ef þú vilt vista síðubúnt staðbundið (til að deila með USB-drifi, tölvupósti o.s.frv.), sjá kafla 12.3.1.2 Flyttu út síðubúnt í staðbundna skrá.

12.3.2 Flytja inn síðubúnt

12.3.2.1 Flytja inn síðubúnt frá myTobiiDynavox

Notaðu þennan valkost til að flytja inn síðubúnt sem þú hefur vistað á myTobiiDynavox reikning þinn eða síðubúnt sem annar myTobiiDynavox notandi hefur deilt með þér.

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflípan**.
3. Veldu **Flytja inn/út síður**.
4. Veldu **Flytja inn síðubúnt**.
5. Veldu **frá myTobiiDynavox**. Valið síðubúnt frá myTobiiDynavox svar opnast.
6. Veldu síðubúnt úr listanum.
7. Til að hlaða niður völdu síðubúnti, velurðu **Næst**.
8. Farðu yfir lista yfir síður sem eru í síðubúntinu. Til að halda áfram með innflutning síðubúnts, velurðu **Flytja inn**. Til að hætta við innflutning síðubúnts, velurðu **Hætta við**.



Síðuárekstur gerist þegar síðubúntið inniheldur eina eða fleiri síður sem eru þegar til á tækinu en eru ekki



eins. Veldu hvert síðuárekstur tákn veldu síðan hvort þú heldur síðunni sem er til eða skrifa yfir með innfluttu síðunni úr síðubúntinu. Þú þarft að leysa úr öllum síðuárekstrum á þennan hátt áður en þú getur haldið áfram með innflutning síðubúntsins.

12.3.2.2 Flytja inn síðubúnt frá staðbundinni skrá

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Velja **síðuflípan**.
3. Veldu **Flytja inn/út síður**.
4. Veldu **Flytja inn síðubúnt**.
5. Veldu **frá staðbundinni skrá**.
6. Veldu **Vafra**. Finndu síðubúntskrána (.spb) sem þú vilt flytja inn og veldu hana, veldu síðan **Opna**.
7. Veldu **Næst**. Skoða síðubúnt svar opnast.
8. Farðu yfir lista yfir síður sem eru í síðubúntinu. Til að halda áfram með innflutning síðubúnts, velurðu **Flytja inn**. Til að hætta við innflutning síðubúnts, velurðu **Hætta við**.



Síðuárekstur gerist þegar síðubúntið inniheldur eina eða fleiri síður sem eru þegar til á tækinu en eru ekki



eins. Veldu hvert síðuárekstur tákn veldu síðan hvort þú heldur síðunni sem er til eða skrifa yfir með innfluttu síðunni úr síðubúntinu. Þú þarft að leysa úr öllum síðuárekstrum á þennan hátt áður en þú getur haldið áfram með innflutning síðubúntsins.

12.3.2.3 Flytja inn síðubúnt og tengja

Þú getur flutt inn síðubúnt og búið til tengil í einu lagi með flytja inn og tengja!

Sjá hluta 8.9.6 *Flytja inn og tengja á síðu*.

13 Notandastillingar

Notandastillingar hjálpa til við að sérsníða notandaupplifun í Snap hugbúnaðinum. Hver notandi getur haft eigin sérsniðnar stillingar sem eru notaðar þegar þú hleður notanda inn í hugbúnaðinn.

13.1 Breyta notanda



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu núverandi notanda.
4. Veldu notanda úr velja notanda listanum.



Notandinn með gátmerkið er núverandi virkur notandi.

13.2 Búa til nýjan notanda



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Nýr notandi**.
4. Fylgdu skrefunum í notandauppsetning leiðsagnarforritinu til að búa til nýjan notanda. Veldu **X** til að hætta við að búa til nýjan notanda.

13.3 Taka öryggisafrit af notanda

Öryggisafrita í myTobiiDynavox



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu örina hægra megin við núverandi notanda.
4. Veldu  **Öryggisafrita** hnappinn við hliðina á heiti notandans sem þú vilt taka öryggisafrit af.
5. Veldu **Öryggisafrita í myTobiiDynavox**.



Ef þú ert ekki skráð/ur inn á myTobiiDynavox reikninginn þinn verður þú beðin/n um að gera það núna.

6. Settu inn heiti fyrir öryggisafritaskrá af notanda, veldu síðan **Næst**.




Það gæti verið gagnlegt að láta dagsetningu öryggisafritunar vera hluta af skráarheitinu.

7. Veldu **Búið**.



Einnig má færa staðbundna öryggisafritunarskrá handvirkt til myTobiiDynavox. Notaðu vafrann þinn til að fara á myTobiiDynavox.com og skráðu þig inn, farðu síðan á *Snap* > *afrit* og veldu **Hlaða upp afriti**.

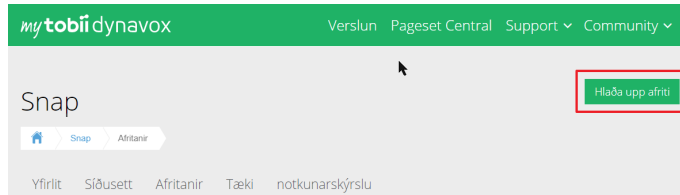

Öryggisafrita í staðbundna skrá



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu örina hægra megin við núverandi notanda.
4. Veldu  **Öryggisafrita** hnappinn við hliðina á heiti notandans sem þú vilt taka öryggisafrit af.
5. Veldu **Öryggisafrita í staðbundna skrá**.
6. (Windows) **Vafra** til skrárinnar þar sem þú vilt vista öryggisafritsskránnu, veldu síðan **Vista**.
(iOS) Settu inn heiti fyrir öryggisafritsskránnu.
7. Veldu **Öryggisafrita**.

13.4 Endurheimta notanda

Endurheimta notanda frá myTobiiDynavox




1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu örina hægra megin við núverandi notanda.
4. Veldu **Nýr notandi**.
5. Veldu **Endurheimta Núverandi Notanda**.
6. Þú ert ekki skráð/ur inn á myTobiiDynavox, settu inn netfangið þitt og aðgangsorð og veldu síðan **Næst**.
7. Veldu notandaöryggisafritaskrá úr listanum og veldu síðan **Næst**.

Endurheimta notanda frá staðbundinni skrá




Í iOS verður fyrst að færa staðbundnar notandaöryggisafritaskrár sem voru búnar til í öðru tæki inn í Snap Core First forritið í gegnum iTunes:

- Opnaðu iTunes á makkanum eða PC-tölvunni.
- Tengdu iPad við tölvuna með USB-snúrunni sem kom með tækinu.
- Veldu tækið í iTunes.

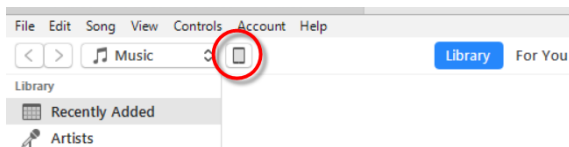

- Í vinstri hliðarstiku velurðu **Forrit**. Síðan skrunarðu niður að skráadeilhlutanum neðst á síðunni.
- Veldu **Snap Core First**.

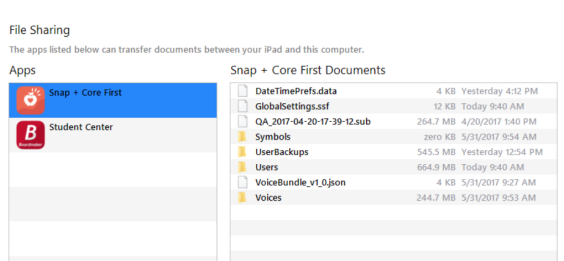

- Dragðu notandaöryggisafritaskrána(skrárna) inn í skjalasvæði Snap Core First.
- Fylgdu skrefunum hér að neðan til að endurheimta notanda á iPad-inum.



- Veldu **Breyta** hnappinn.
- Velja **Notandi** flipann.
- Veldu örina hægra megin við núverandi notanda.
- Veldu **Nýr notandi**.
- Veldu **Endurheimta Núverandi Notanda**.
- Veldu **Endurheimta frá staðbundinni skrá**.
- (Windows) Leitaðu að notanda öryggisafritaskránni og veldu hana, veldu síðan **Opna**.
(iOS) Veldu notandaöryggisafritaskrá úr listanum og veldu síðan **Endurheimta notanda**.

13.5 Breyta/Endurnefna notanda



- Veldu **Breyta** hnappinn.
- Velja **Notandi** flipann.
- Veldu **Breyta** hnappinn við hliðina á nafni notandans sem þú vilt breyta.
- Sláðu inn **Heiti** reitinn.
- Veldu **Vista** til að vista breytingarnar eða **Hætta við** til að henda breytingunum.

13.6 Eyða notanda



Eyðing notanda úr tækinu er varanleg aðgerð. Ef þú heldur að þú gætir þurft notandann síðar, skaltu búa til öryggisafrit af notanda 13.3 *Taka öryggisafrit af notanda* áður en þú eyðir honum.



- Veldu **Breyta** hnappinn.
- Velja **Notandi** flipann.

3. Veldu  **Eyða** hnappinn við hliðina á nafni notandans sem þú vilt eyða.

 Þú getur ekki eytt notanda sem er virkur núna.

4. Veldu rauða **Eyða** hnappinn.
5. Veldu **Eyða** til að eyða notanda varanlega. Veldu **Hætta við** til að fara aftur í stillingavalmynd án þess að eyða notanda.

13.7 Innskráning á myTobiiDynavox reikning

 Innskráning á myTobiiDynavox reikning krefst virkrar nettengingar.


Sum þjónusta í Snap Core First, svo sem samstilling, krefst þess að þú skráir þig inn með myTobiiDynavox reikningi. Veldu **Skrá inn** til að setja inn myTobiiDynavox skilríki þín eða búa til nýja myTobiiDynavox reikning. Ef þú ert skráður inn, sést myTobiiDynavox notandanafn þitt eða netfang í myTobiiDynavox reikningshlutanum.

13.8 Rödd

13.8.1 Talrödd

Talröddin er rödd sem les efni skilaboðaglugga og hnappaskilaboð.

Talrödd er sjálfgefin rödd, hún er ekki tengd sérstöku tungumáli. Ef tungumála-sértækum röddum hefur verið úthlutað verða tungumála-sértækar raddir notaðar í staðinn fyrir þau tungumál. Til að úthluta tungumála-sértækum röddum, sjá **13.10 Tungumála-sértækar raddir**.

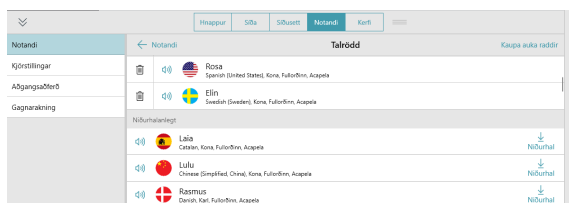

Skýringarmynd 13.1 Notandaflipi — talrödd

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Talrödd**.

13.8.1.1 Uppsettar raddir

Þetta eru raddirnar sem eru núna tiltækar til tafarlausrar notkunar á tækinu. Þær ná bæði yfir foruppsettar raddir og raddir sem er halað niður á tækið.

 Þú getur eytt röddum í uppsetningarlistanum en þú getur ekki eytt röddinni sem er virk núna.

13.8.1.2 Raddir sem hægt er að hala niður.

Ná í nýjar raddir.

 Þú verður að vera með virka nettengingu til að ná í raddir.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Talrödd**.
4. Í lista yfir niðurhalanlegar raddir, skaltu velja **Niðurhal** við hliðina á viðeigandi rödd.



Í iOS, er hlé gert á niðurhali radda þegar Snap Core First forritið er falið.

13.8.1.3 Raddir sem hægt er að kaupa.

Snap Core First (full) inniheldur eina talvél og aðgang að öllum röddum sem tilheyra þeirri talvél. Viðbótarraddir eru fáanlegar gegn gjaldi. Þegar þú kaupir talvél færðu aðgang að öllum 100+ tengdum röddum.

Forskoða og kaupa raddir



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Talrödd**.
4. Flettu niður á *Kaup* hlutann.
5. Veldu  til að forskoða rödd.
Veldu **Kaupa viðbótarraddir** til að kaupa.

13.8.1.4 Vettvangsraddir

Þetta eru raddir sem stýrikerfið þitt lætur þig hafa og SAPI5 raddir.



Sumar raddir koma tvisvar sinnum fyrir ef þær eru til bæði í innbyggðri vettvangsútgáfu og á SAPI5 útgáfu.
SAPI5 er eingöngu fyrir Windows

13.8.2 Raddtíðni

Raddtíðni er hraðinn sem orð eru sögð á.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Færðu **Raddtíðni sleðarofi** til vinstri til að tala hægar eða til hægri til að tala hraðar.

13.8.3 Undantekning í framburði

Undantekningar í framburði eru orð eða skammstafanir sem þú kennir röddinni að bera fram á vissan hátt. Undantekningar í framburði eru tengdar röddinni sem er virk þegar undantekningar í framburði eru búnar til. Ef þú skiptir í aðra rödd og vilt nota áfram sömu undantekningar í framburði verður þú að flytja undantekningar í framburði inn frá fyrri röddu.

Undantekningar í framburði eru líka tiltækar fyrir tungumála-sértækar raddir. Sjá hluta 13.10 *Tungumála-sértækar raddir*.




Undantekningar í framburði er ekki hægt að flytja inn á milli stýrikerfa (Windows ⇌ iOS).

Búa til nýja undantekningu í framburði



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Undantekning í framburði**.
4. Veldu **Bæta við undantekningu í framburði**.


Bæta við undantekningu í framburði svarið birtist.

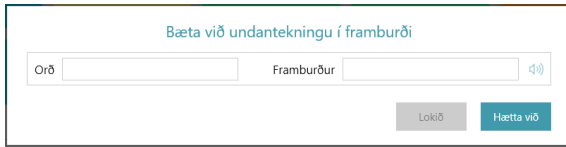

5. Í **Orð** reitnum skaltu skrifa orðið eins og það er skrifað.
6. Í **Framburður** reitnum skaltu slá orðið inn hljóðfræðilega eins og þú vilt að það sé borið fram. Til að prufa framburðinn velurðu forskoðunarhnappinn.
7. Veldu **Búið** til að vista undantekningu í framburði Veldu **Hætta við** til að henda breytingum og fara aftur í notandastillingar.

Flytja inn undantekningu í framburði

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Undantekning í framburði**.
4. Veldu **Flytja inn frá annarri rödd**.

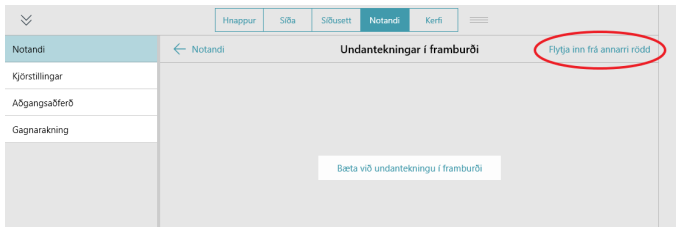

5. Veldu röddina sem hefur undantekningar í framburði sem þú vilt flytja inn.



Aðeins raddir sem hafa tengdar undantekningar í framburði verða birtar í listanum.

6. Veldu **Flytja inn** til að flytja inn allar undantekningar í framburði sem tengjast valinni röddu. Veldu **Hætta við** til að fara aftur í notandastillingar án þess að flytja inn.



Þegar þú hefur flutt inn undantekningar í framburði frá annarri röddu, er mælt með að þú prufir þær með núverandi röddu. Veldu  Forskoða hnappinn á undantekningu í framburði til að heyra hana talaða með núverandi röddu.

13.9 Úttakstæki tals

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Úttakstæki tals**.
4. Stilla Nota sjálfvalið tæki á **kveikt** til að nota sjálfvalið úttakstæki Windows. Stilla Nota sjálfvalið tæki á **slökkt** til að sjá lista yfir tiltæk úttaksstæki.
 - a. Veldu úttakstæki úr listanum til að nota tækið fyrir talúttak. Til að forskoða tæki skaltu velja spila hnappinn fyrir tækið.

13.10 Tungumála-sértækar raddir

Þú getur úthlutað rödd til tungumáls, þannig að efni á því tungumáli sé talað með réttum framburði.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Tungumála-sértækar raddir**.
4. Veldu **Bæta við rödd fyrir annað tungumál**.
5. Veldu **Tungumál**, veldu síðan tungumál úr tungumálista radda. Veldu **Ný rödd** eftir að þú hefur valið tungumálið.
6. Veldu **Rödd**, veldu síðan rödd úr uppsett hluta raddalistans. Veldu **Ný rödd** eftir að þú hefur valið rödd þína.



Sumar raddir eru tiltækar sem ókeypis niðurhal (nettengingar krafist). Veldu **Niðurhal** við hlið viðeigandi raddar.. Þegar niðurhali er lokið, skaltu finna og velja röddina í uppsetthluta raddalistans.

7. (Valfrjálst) stilltu raddtíðni fyrir valið tungumál/rödd.
8. (Valfrjálst) Bættu við undantekningum í framburði fyrir röddina. Sjá hluta **13.8.3 Undantekning í framburði**.

13.11 Google aðgangur

Tengdu Google aðganginn þinn til að nota Google Assistant, snjallhátalara, og snjalltæki með Snap Core First.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Skrúnaðu niður og veldu **Tengjast Google** Sjálfgefinn vafri mun opnast.
4. Skráðu þig inn á Google aðganginn þinn.
5. Þegar beðið er um það, veldu **Leyfa** til að gefa Snap Core First leyfi til að hafa samskipti við Google Assistant fyrir þína hönd.
6. Fara aftur í Snap Core First.



Til að skrá þig út úr Google aðganginum þínum í Snap Core First, veldu **Aftengja**.

13.12 Kjörstillingar notanda

13.12.1 Talstillingar



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Kjörstillingar** flokkur.
4. Stilltu alltaf trufla tal fyrir nýtt tal á **Kveikt** (Tal sem er í gangi mun stöðvast til að tala nýja skipun) eða **Slökkt** (talskipanir fara í röð þannig að núverandi tal mun klárast, síðan mæla nýju talskipunina).

13.12.2 Stillingar skilaboðaglugga



Skýringarmynd 13.2 Notaðu tákn í skilaboðaglugga virkjað



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Kjörstillingar** flokkur.
4. Stilltu eftirfarandi kjörstillingar á annað hvort **Kveikt** (virkt) eða **Slökkt** (óvirkt):

- Nota tákn í skilaboðaglugga — þegar það er virkt verða orð og setningar í skilaboðaglugganum táknmyndaðar.
- Sýna alltaf bendilinn í skilaboðaglugganum — Þegar hann er virkur er bendillinn alltaf sýnilegur í skilaboðaglugganum. Þegar það er óvirkt er bendillinn aðeins sýnilegur þegar hann er færður frá sjálfgefinni stöðu í lok texta skilaboðagluggans.
- Tala við innsetningu í skilaboðaglugga — þegar þetta er virkt, verður hvert orð eða setning töluð þegar það er sett inn í skilaboðagluggann.
- Tala stafi — þegar þetta er virkt, verður hver stafur talaður og settur inn í skilaboðagluggann.



Til að virkja „tala stafi“ þarf stillingin „tala við innsetningu í skilaboðaglugga“ að vera virkjuð.

- Hreinsa eftir tal — Eftir að búið er að tala texta í skilaboðaglugga er textinn hreinsaður út og næsti texti settur inn.
- Beygja sjálfvirkt málfræðihnappar — þegar þeir eru virkir munu málfræðihnappar uppfærast eftir þörfum til að passa við málfræðisamhengi efnisins í skilaboðaglugganum.
- Búa sjálfkrafa til styttingar — þegar þetta er virkt myndast algengar styttingar úr tveimur orðum (til dæmis „kom þú“ verður „komdu“).

13.12.3 Spástillingar



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Kjörstillingar** flokkur.
4. Stilla sýna tákn á spáhnöppum á **Kveikt** (Spáhnappar sýna tákn fyrir núverandi spáð orð) eða **Slökkt** (Spáhnappar sýna aðeins texta).

13.12.4 Stillingar samstillingar



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Kjörstillingar** flokkur.
4. Stilla Virkja samstillingu í notkunarstillingu á **Kveikt** (Samstillingarhnappur er sýnilegur í efstu stiku í bæði notkunarham og breytingaham) eða **Slökkt** (Samstillingarhnappur er falinn í efstu stiku í notkunarham en sýnilegur í breytingaham).

13.13 Aðgangsaðferð

Snerting

Hlutir eru virkjaðir með því að snerta hlutinn á skjánum með fingri eða, þegar mús er notuð, með því að smella á hlutinn með músabendlinum. Þessi aðgangsaðferð hentar fyrir notendur sem geta snert skjáinn hratt og af nákvæmni eða stjórnað og vinstrismellt með venjulegri tölvumús. Hlutir eru virkjaði um leið og þeir eru snertir eða smellt er á þá.

Snerting innsláttur

Hlutir eru virkjaðir með því að snerta þá líkamlega og halda niðri hlutum á skjánum í lágmarkstíma eða, þegar mús er notuð, með því að smella og halda niðri hlutum í lágmarkstíma. Biðtíminn er stilltur inn af notanda. Þessi aðgangsaðferð er gagnleg fyrir notendur sem gætu snert eða smellt hluti óvart.

Snerting hætta

Þessi aðferð er lík halda við, en valinn hlutur er virkjaður þegar valinu er sleppt. Þessi aðferð gerir notanda kleift að halda snertingu við snertiskjáinn án þess að velja óvart. Þetta þýðir að notandi getur rennt fingri eða bendli yfir snertiskjáinn eða haldið niðri músahnappi á meðan hann færir bendilinn. Val verður ekki gert fyrr en fingri eða bendli er sleppt af snertiskjánum, eða þegar músahnappi er sleppt. Þetta gerir snerta út valaáðferðina upplagða fyrir manneskju sem gæti fundist það auðveldara að draga fingur eða bendil yfir snertiskjá á meðan hún færir sig frá vali til vals.

Músardvöl

(Aðeins Windows) Músadvalar aðgangsaðferð krefst þess að tölvumús, stýrikúla, eða höfuðmús stjórni bendlinum á skjánum. Hlutur er valinn þegar bendillinn staldrar við hlut í tiltekna tímalengd eða þegar notandi virkjar rofa. Þessi aðgangsaðferð er góður valkostur fyrir manneskju sem hefur líkamlega getu til að nota mús, en skortir getuna til að ýta niður á músahnaðinn til að velja.

Gaze Interaction

(Aðeins Windows) Þessi aðferð gerir notanda kleift að stjórna Snap Core First með augunum eingöngu. Val er gert með því annað hvort að festa augun á hlut í tiltekinn tíma (dvöl), virkja rofa eða með því að blikka. Gaze Interaction krefst augnstýringartækis frá Tobii Dynavox.

Skönnun

Þegar skönnun er virk valaðferð, eru hlutir á skjánum auðkenndir í sérstöku mynstri. Skönnun krefst rofa eða lyklaborðslyksils til að velja þegar viðeigandi hlutur er auðkenndur. Þessi aðgangsaðferð er ætluð einstaklingi sem hefur ekki hreyfigetu til að nota beinar valaðferðir á áhrifaríkan hátt.



Til að fá að vita meira um aðgangsaðferðir geturðu horft á aðgangsaðferðamyndbönd sem er að finna í *Kerfi — Hjálp og leiðbeiningar*.

13.13.1 Sjá aðgangsaðferð



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Aðgangsaðferð** flokkur.
4. Veldu núverandi aðgangsaðferð.
5. Veldu aðgangsaðferð úr listanum.

13.13.2 Snerti valkostur



Snerting er sjálfvalin aðgangsaðferð.

Þegar snerti aðgangsaðferð er notuð eru hlutir virkjaðir með því að snerta hlutinn á skjánum með fingri eða, þegar mús er notuð, með því að smella á hlutinn með músabendlinum. Þessi aðgangsaðferð hentar fyrir notendur sem geta snert skjáinn hratt og af nákvæmni eða stjórnað og vinstrismellt með venjulegri tölvumús. Hlutir eru virkjaði um leið og þeir eru snertir eða smellt er á þá.



Yfirlitsgerð

Yfirlitsgerðin er hvernig notandi getur skrúnað á síðunni og tækjastikunni. Þú getur valið að skrúna með því að renna fingri eftir skjánum, velja yfirlitshnappana eða bæði.

Strokur

- Skrúnaðu upp og niður síðuna og tækjastikuna með því að renna fingri á snertiskjánum. (Aðeins með snertiaðgangi.)

Yfirlitshnappar

- Örvahnappar birtast á síðunni og tækjastikunni þegar það er meira efni fyrir ofan eða neðan. Örvayfirlitshnappar eru aðgengilegir öllum aðgangsaðferðum.



Strokur og yfirlitshnappar


- Bæði strokur og yfirlitshnappar eru virkjaðir þannig að nota má hvora yfirlitsgerð sem er til að færa upp og niður í gegnum efnið. (Aðeins með snertiaðgangi.)

Val hljóðsvörun hljóð

Spila hljóð þegar hnappur sem talar ekki er valinn.

13.13.3 Halda við valkostur

Þegar halda við er valin aðgangsaðferð, eru hlutir virkjaðir með því að snerta þá og halda niðri hlutum á skjánum í lágmarkstíma eða, þegar mús er notuð, með því að smella og halda niðri hlutum í lágmarkstíma. Biðtíminn er stilltur inn af notanda. Þessi aðgangsaðferð er gagnleg fyrir notendur sem gætu snert eða smellt hluti óvart.

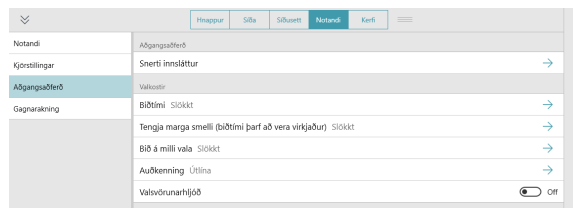

dvalartími

Dvalartími er lágmarks tími sem þarf til að velja og halda niðri hlut til að virkja hann.

Tengja marga smelli

Þessi stilling skynjar marga smelli sem eiga sér stað innan tiltekins tímaramma og tengir þá þannig að þeir séu skráðir sem einn langur smellur og bið. Þessi stilling er gagnleg ef notandi á erfitt með að halda vali stöðugt.

Þegar tengja marga smelli er virkt getur þú valið tímaramman sem smellirnir eru tengdir saman í. Til dæmis þegar stillt er á meðal eru allir smellir sem eiga sér stað innan 1,3 sekúndna tímabils (sem byrjar á fyrsta smellnum) skráðir sem einn langur smellur og bið.


Bið á milli vala

Þessi stilling gerir þér kleift að stilla inn tíma þar sem Snap hunsar tilraunir til vals eftir að val hefur verið gert. Virkjun bils á milli vala getur hjálpað til við að koma í veg fyrir óviljandi endurtekið val í hugbúnaðinum.

Þegar bil á milli vala er virkjað getur þú valið tímarammann sem valtilraunir eru hunsaðar eftir að val hefur verið gert. Til dæmis, þegar stillt á meðal, mun Snap hunsa allar valtilraunir sem eiga sér stað innan 2 sekúndna eftir val.

Auðkenning

Veldu viðeigandi auðkenningargerð og lit. Auðkenning er sjónrænt merki sem sýnir þegar hlutur er valinn. Auðkenning hættir þegar hluturinn hefur verið virkjaður.

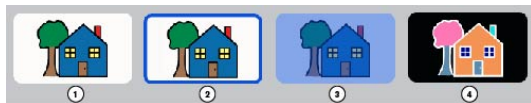


1. Engin auðkenning
2. Útlína
Valkostir: Litur, þykkt auðkenningar
3. Yfirlögn
Valkostur: Litur
4. Umsnúa

Val hljóðsvörun hljóð

Spila hljóð þegar hnappur sem talar ekki er valinn.

13.13.4 Snerta út valkostur

Þegar snerta út er notað er valinn hlutur virkjaður þegar valinu er sleppt. Þessi aðferð gerir notanda kleift að halda snertingu við snertiskjáinn án þess að velja óvart. Þetta þýðir að notandi getur rennt fingri eða bendli yfir snertiskjáinn eða haldið niðri músahnappi á meðan hann færir bendilinn. Þegar bendillinn færir sig yfir hnappana verður hnappurinn sem er núna valinn auðkenndur. Hnappur er ekki virkjaður fyrr en fingri eða bendli er sleppt af snertiskjánum, eða þegar músahnappi er sleppt. Þetta gerir snerta út vala aðferðina upplagða fyrir manneskju sem gæti fundist það auðveldara að draga fingur eða bendil yfir snertiskjá á meðan hún færir sig frá vali til vals. Þetta er líka gagnlegt fyrir fólk sem hagnast af sjónrænni svörun til að gera nákvæmt val.

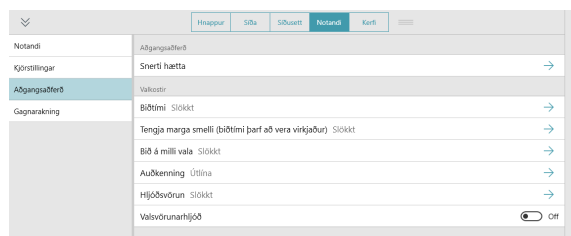

dvalartími

dvalartími er lágmarks tími sem þarf til að velja og halda niðri hlut til að virkja hann við sleppingu.

Tengja marga smelli

Þessi stilling skynjar marga smelli sem eiga sér stað innan tiltekins tímaramma og tengir þá þannig að þeir séu skráðir sem einn langur smellur og bið. Þessi stilling er gagnleg ef notandi á erfitt með að halda vali stöðugt.

Þegar tengja marga smelli er virkt getur þú valið tímaramman sem smellirnir eru tengdir saman í. Til dæmis þegar stillt er að meðal eru allir smellir sem eiga sér stað innan 1,3 sekúndna tímabils (sem byrjar á fyrsta smellnum) skráðir sem einn langur smellur og bið.

Bið á milli vala

Þessi stilling gerir þér kleift að stilla inn tíma þar sem Snap hunsar tilraunir til vals eftir að val hefur verið gert. Virkjun bils á milli vala getur hjálpað til við að koma í veg fyrir óviljandi endurtekið val í hugbúnaðinum.

Þegar bil á milli vala er virkjað getur þú valið tímarammann sem valtilraunir eru hunsaðar eftir að val hefur verið gert. Til dæmis, þegar stillt á meðal, mun Snap hunsa allar valtilraunir sem eiga sér stað innan 2 sekúndna eftir val.

Auðkenning

① ② ③ ④

- ## Hljóðsvörun

Val hljóðsvörun hljóð

13.13.5 Músadvöl valkostir

Notandi		Hnappur	Síða	Sísurtti	Notandi	Kerfi	
Notandi	Aðgangsaðferð						
Kjörstillingar	Músa dvöl						→
Aðgangsaðferð	Valkentr						
Gagnaratriðing	Gerð vals - Dvölja - 1.0s						→
	Auðkenning Útlina						→
	Hjófðvörðun Slökkt						→
	Sjina hlé á aðgangsaðferð hnappi í notkunarham						☒ On
	Valsvörðunahjóf						☐ Off


Dvelja

- ## Rofi

- #12005874 Snap™ Core First® Notandahandbók v.1.15 - is-IS



Fyrir þessa aðgangsaðferð er „Ekki auðkenna“ ekki valkostur.

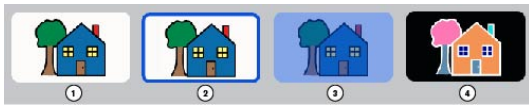

1. Engin auðkenning
2. Útlína
Valkostir: Litur, þykkt auðkenningar
3. Yfirlögn
Valkostur: Litur
4. Umsnúa

Hljóðsvörun

Þegar hljóðsvörun er virk heyrir notandi hljóðmerki þegar það er auðkennt. Hljóðmerki er orð eða stutt skilaboð sem hjálpa til við að þekkja hlutinn. Hægt er að velja aðra rödd fyrir hljóðsvörun, tungumála-sértækar hljóðsvörunarraddir, auk sérsníðinnar hljóðtíðni og undantekningar í framburði.

Sýna hlé á aðgangsaðferð hnapp í notkunarham

Þegar þetta er virkt, birtist hlé/byrja aftur aðgangsaðferð hnappur á efstu slánni í notkunarham. Þegar þetta er óvirkt er hnappurinn falinn.

Val hljóðsvörun hljóð

Spila hljóð þegar hnappur sem talar ekki er valinn.

13.13.6 Gaze Interaction valkostir

(Aðeins Windows) Þessi aðferð gerir notanda kleift að stjórna Snap Core First með augunum eingöngu. Val er gert með því annað hvort að festa augun á hlut í tiltekinn tíma (dvöl), virkja rofa eða með því að blikka. Augntillitsval krefst augnstýringartækis frá Tobii Dynavox.

Valtegun

Dvelja

- Gerir notanda kleift að velja með því að festa augun á hlut í tiltekinn tíma (dvalartími).
 - Dvalartími — stillir inn tímann sem augntillitið þarf að vera á hlutnum til að velja hann.

Rofi

- Notandi beinir auðkenningu á skjánum með augntilliti og velur síðan með rofa.
 - Rofainntak — stillir inn lyklaborðslykilinn sem virkar sem rofainntak.



Verið getur að rofaval með lyklaborðslykli eða Bluetooth-rofa virki ekki fyrir utan Snap-hugbúnaðinn.

- Tímalengd þrýstings á rofa — tíminn sem þarf að virkja rofann í til að velja hlutinn sem núna er auðkenndur.
- Tímalengd endurtöku rofa — tíminn sem notandi þarf að bíða á milli rofavirkjunar. Áður en þessi tími er búinn eru frekari rofavirkjanir hunsaðar.

Blikka

- Gerir notanda kleift að velja með því að blikka augunum í tiltekinn tíma.
 - Lágmarks tímalengd blikks — stillir lágmarkstíma sem augu notanda þurfa að vera lokuð til að velja.
 - Hámarks tímalengd blikks — stillir hámarkstíma sem augu notanda geta verið lokuð til að velja. Ef augu notanda eru lokuð lengur en hámarks tímalengd blikks er ekkert valið.

Augnsvörun

Augnsvörun er sjónrænt merki sem sýnir notanda hvar augntillit þeirra er skráð á skjánum, hversu stöðugt og í hvað langan tíma.

Stilltu inn stíl, lit og stærð augnsvörunar.

Fresta eftir breytingu á síðu

Eftir að farið er á nýja síðu getur val ekki átt sér stað í tiltekinn tíma. Þetta kemur í veg fyrir óviljandi val þegar síða opnast fyrst.

Windows stjórnunartegund

Stillir inn aðgangsstjórnun skjáborðs fyrir yfirlit utan Snap-hugbúnaðar.

- Augntillitsval — þetta er tveggja skrefa valaðferð sem dregur úr hættunni á óviljandi smellum.
- Músahermun — hermir eftir og stjórnar venjulegum PC-músabendli á skjánum.

Hljóðsvörun

Þegar hljóðsvörun er virk heyrir notandi hljóðmerki þegar það er auðkennt. Hljóðmerki er orð eða stutt skilaboð sem hjálpa til við að þekkja hlutinn. Hægt er að velja aðra rödd fyrir hljóðsvörun, auk sérsniðinnar hljóðtíðni og undantekningar í framburði.

Sýna hlé á aðgangsaðferð hnapp í notkunarham


Þegar þetta er virkt, birtist hlé/byrja aftur aðgangsaðferð hnappur á efstu slánni í notkunarham. Þegar þetta er óvirkt er hnappurinn falinn.

Val hljóðsvörun hljóð

Spila hljóð þegar hnappur sem talar ekki er valinn.

13.13.7 Skönnunar valmöguleikar

Þegar skönnun er virk valaðferð, eru hlutir á skjánum auðkenndir í sérstöku mynstri. Notandi virkjar rofa eða lyklaborðslykil til að velja þegar viðeigandi hlutur er auðkenndur. Þessi aðgangsaðferð er ætluð einstaklingi sem hefur ekki hreyfigetu til að nota beinar valaðferðir á áhrifaríkan hátt.

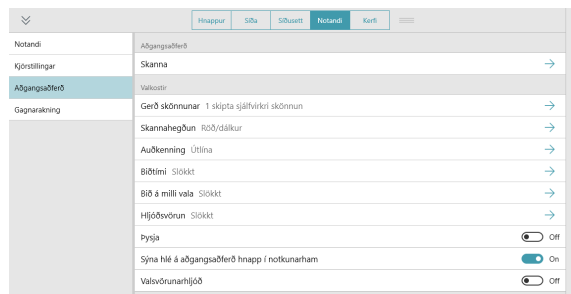

Skönnunartegund

Skönnunartegundarstilling ákvarðar hvernig skönnunar auðkenning fer áfram (sjálfvirk eða með rofaval) og hvernig val er framkvæmt.

1 rofa sjálfvirk skönnun

- Þegar 1 rofa sjálfvirk skönnun er notuð, mun hugbúnaðurinn skanna hlutina á síðunni með þar til gerðu skönnunarmynstri. Notandi velur með rofa.
 - Rofainttak — veldu annað hvort skjásmell eða lyklaborðslykil.
 - Hraði — hversu hröð sjálfvirka skönnunin er.
 - Umbreytingartími — stilltu inn tímann á milli vals og áframhalds sjálfvirkar skönnunar.
 - Skanna eftir — veldu hvenær sjálfvirk skönnun ætti að hefjast aftur: Val, síðubreyting, tal.
 - Segðu allt hljóðmerkið áður en farið er áfram — þegar þetta er virkt tefja löng hljóðmerki framgang skönnunar-auðkenningar þar til allt hljóðmerkið hefur verið sagt.

2 rofa skrefa skönnun

- Þegar tveggja skipta skrefa skönnun er notuð mun notandi virkja einn rofa til að halda áfram með skönnunarauðkenningu og annan rofa til að velja.
 - Rofi 1 inntak — veldu annað hvort skjásmell eða lyklaborðslykil til að halda áfram með skönnunarauðkenningu.
 - Rofi 2 inntak — veldu annað hvort skjásmell eða lyklaborðslykil til að velja.



Rofi 1 inntak og rofi 2 inntak þurfa að vera mismunandi.

1 rofa skönnun

- Þegar 1 rofa skönnun skönnunar valkosturinn er virkur, notar notandi rofann til að fara áfram með auðkenninguna (hvert val fer með auðkenninguna áfram um eitt bil). Til að velja auðkenndan hlut velur notandi rofann og viðheldur valinu í tiltekinn hléttíma.
 - Rofi 1 inntak — veldu annað hvort skjásmell eða lyklaborðslykil til að halda áfram með skönnunarauðkenningu.
 - Hléttími — lágmarks tími sem þarf til að velja og halda niðri hlut til að virkja hann.

1 rofa dvalar skönnun

- Þegar 1 rofa dvalarskönnun skönnunar valkosturinn er virkur, notar notandi rofann til að fara áfram með auðkenninguna (hvert val fer með auðkenninguna áfram um eitt bil). Til að velja auðkenndan hlut gerir notandi hlé (gerir ekkert) í tiltekinn hléttíma.
 - Rofi 1 inntak — veldu annað hvort skjásmell eða lyklaborðslykil til að halda áfram með skönnunarauðkenningu.
 - Hléttími — lágmarks tími sem þarf til að dvelja á hlut til að virkja hann.

Öfug skönnun

- Einstaklingur sem notar öfuga skönnun heldur niðri rofanum til að fara áfram með skönnunarauðkenninguna (auðkenningin heldur áfram að færast áfram á meðan rofanum er haldið niðri). Þegar einstaklingur sleppir rofanum verður auðkenndi hluturinn valinn.
 - Rofi 1 inntak — veldu annað hvort skjásmell eða lyklaborðslykil til að halda áfram með skönnunarauðkenningu.
 - Hraði — hversu hratt skönnunarauðkenningin fer áfram (á meðan rofanum er haldið niðri).
 - Segðu allt hljóðmerkið áður en farið er áfram — þegar þetta er virkt tefja löng hljóðmerki framgang skönnunarauðkenningar þar til allt hljóðmerkið hefur verið sagt.

Skannahegðun

Skönnunarmynstrið er röðin sem hlutir á skjánum eru auðkenndir í fyrir val. Þessi hluti inniheldur einnig stillingar sem tengjast hverskonar hlutir eru skannaðir.

Mynstur

- Röð/dálkur — skannar raðir ofan frá og niður þegar röð er valin eru hlutirnir í röðinni skannaðir frá vinstri til hægri.
- Dálkur/röð — skannar dálka frá vinstri til hægri. Þegar dálkur er valinn eru hlutirnir í dálknum skannaðir ofan frá og niður.
- Línulega — hlutir eru skannaðir hver fyrir sig frá vinstri til hægri, ofan frá og niður.

Fjöldi yfirferða

- Yfirferðir — stilltu hversu mörgum sinnum skönnunin mun skanna röð eða dálk án þess að valið sé.
- Eftir loka yfirferð — veldu hvað gerist þegar sjálfvirk skönnun hefur lokið tilteknum fjölda yfirferða (ekki tiltækt fyrir óendanlegar yfirferðir).

Hóp skönnun

- Þegar hún er virk eru síðuhnapparnir skannaðir í hópa.



Skannaðir hópar verða að vera tilgreindir fyrirfram. Sjá hluta 8.14 *Skannaðir hópar*.

Skanna frá síðasta vali

- Þegar þetta er virkt mun skönnun hefjast aftur á síðunni þar sem síðasta val var gert. Þegar þetta er óvirkt byrjar skönnun aftur efst á síðunni eftir að valið er.

Skanna slá að ofan

- Þegar þetta er virkt eru hlutir sem hægt er að skanna í efstu stiku (til baka, heim og stjórnborð) skannaðir. Þegar þetta er óvirkt eru hlutir í efstu stiku ekki skannaðir.



Leita, samstilla, gera hlé á aðgangsaðferð og breyta hnapparnir í efstu stiku ekki skannaðir. Þá má alltaf nota með snertingu.

Skanna tóma hnappa


- Þegar þetta er virkt eru hnappar sem hafa ekkert efni skannaðir. Þegar þetta er óvirkt eru tómir hnappar ekki skannaðir.

Auðkenning

Veldu viðeigandi auðkenningargerð og lit. Auðkenning er sjónrænt merki sem sýnir þegar hlutur er skannaður. Auðkenning hættir þegar hluturinn hefur verið virkjaður.



Fyrir þessa aðgangsaðferð er „Ekki auðkenna“ ekki valkostur.

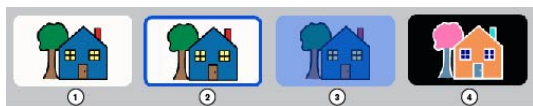

1. Engin auðkenning
2. Útlína
Valkostir: Litur, þykkt auðkenningar
3. Yfirlögn
Valkostur: Litur
4. Umsnúa

Dvalartími

Dvalartími er lágmarks tími sem þarf til að velja og halda niðri hlut til að virkja hann.

Bið á milli vala

Bil á milli vala hjálpar til við að koma í veg fyrir að rofaval sé óvart tvítekið. Þegar rofaval er gert, getur næsta rofaval ekki átt sér stað fyrr en tíminn sem stilltur er inn í bið á milli vala er liðinn. Ef ýtt er á rofann á meðan biðtími er í gangi endurræst niðurtalningin.

Hljóðsvörun

Þegar hljóðsvörun er virk heyrir notandi hljóðmerki þegar það er auðkennt. Hljóðmerki er orð eða stutt skilaboð sem hjálpa til við að þekkja hlutinn. Hægt er að velja aðra rödd fyrir hljóðsvörun, tungumála-sértækar hljóðsvörunarraddir, auk sérsníðinnar hljóðtíðni og undantekningar í framburði.

Pysjun

Þegar hún er virk eru pysjað að skjáhlutum þegar þeir eru skannaðir. Þegar margir hlutir eru skannaðir (raðir eða dálkar) er pysjað að fyrsta hlutnum í mynstrinu og hinir auðkenndir eins og tiltekið er í stillingum auðkennisstíl.

Sýna hlé á aðgangsaðferð hnapp í notkunarham

Þegar þetta er virkt, birtist hlé/byrja aftur aðgangsaðferð hnappur á efstu slánni í notkunarham. Þegar þetta er óvirkt er hnappurinn falinn.

Val hljóðsvörun hljóð

Spila hljóð þegar hnappur sem talar ekki er valinn.

13.14 Gagnarakning

13.14.1 Vöktun hnappanotkunar

Þegar vöktun hnappanotkunar er virk eru upplýsingar um hnappanotkun í Snap Core First skrásettar. Þessar upplýsingar innihalda tíma hnappanotkunarinnar, skilaboðin, tungumál, síðuset, síðu, rúðustaðsetningu, aðgangsaðferð (t.d. gaze interaction), sýningarham og hvort hnappurinn talaði eða setti inn í skilaboðagluggann.



Hnappanotkunarupplýsingar eru ekki skrásettar í breytingarham.

Virkja vöktun hnappanotkunar



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Gagnarakning** flokkur.
4. Setja **Vöktun hnappanotkunar** á kveikt.
5. Lestu gagnaverndarviðvörðunina og veldu **Já** til að virkja vöktun hnappanotkunar. Ef þú vilt ekki virkja vöktun hnappanotkunar, skaltu velja nei.



Hægt er að skoða hnappanotkunartalningu í Snap Core First hugbúnaðinum með því að virkja sýna hnappanotkunartalningu og/eða sýningarartalningu. Fyrir frekari upplýsingar sjá kafla **13.14.3 Sýna hnappanotkunartalningu** og **13.14.4 Sýna sýningarartalningu**. Frekari gagnasjónsköpun er tiltæk í **notkunarskýrsluhluta** myTobiiDynavox.com reikningi þínum.

Þegar vöktun hnappanotkunar er virk á hún sér alltaf stað þegar Snap Core First hugbúnaðurinn er notaður. Fyrir nákvæm notkunargögn er mikilvægt að aðgreina á milli hnappavals notanda og sýningarvals umönnunaraðila eða tjáskiptafélaga. Ef notandi á tjáskipti við Snap Core First í gegnum aðgangsaðferð sem byggir ekki á snertingu (músadvöl, Gaze Interaction, eða skönnun) er hverskonar hnappaval sem gert er með snertingu sjálfvirk skrásett sem sýning. Ef notandi á tjáskipti við Snap Core First í gegnum aðgangsaðferð sem byggir á snertingu verður umönnunaraðili að virkja sýningarham áður en hann sýnir eitthvert val og afvirkja hann síðan aftur áður en notandi velur næst.



Ef vöktun hnappanotkunar er virkjuð og notandi hefur aðgangsaðferð sem byggir á snertingu skaltu passa að sýna hnappa á efstu stíku sé líka virkjuð. Sjá hluta **13.14.2 Sýna hnappa á efstu stíku**.



Þegar þú deilir síðuseti sem hefur notkunargögn hefur þú möguleika á að hafa notkunargögnin með eða ekki.

Virkja sýningarham (aðeins nauðsynlegt ef aðgangsaðferð er stillt á snertingu, halda við, snerta út eða þegar skjárin er notaður sem rofi)



Ef núverandi aðgangsaðferð inniheldur gera hlé á aðgangsaðferð hnapp í efstu stíku, skaltu gera hlé á



aðgangsaðferð áður en þú byrjar á skrefunum hér að neðan. Hættu við hlé á aðgangsaðferð áður en þú ferð úr sýningarham.



1. Veldu **Gagnarakning** hnappinn í efstu stíku.

Til að virkja gagnarakningar hnappinn í efstu stiku, sjá kafla 13.14.2 *Sýna hnappa á efstu stiku*.

2. Virkja **Sýningarhamur**.
Þegar þú hefur lokið sýningu skaltu muna að afvirkja sýningarham.



Þú getur einnig kveikt og slökkt á sýningarham með því að gera langan smell (smella og halda) á gagnarakningarhnappinn í efstu stiku. Þegar sýningarhamur er virkur lítur gagnarakningarhnappurinn svona út




Þegar sýningarhamur er óvirkur lítur gagnarakningarhnappurinn svona út



13.14.2 Sýna hnappa á efstu stiku

Þegar hann er virkjaður, mun  Birtist gagnarakningarhnappurinn í efstu stiku. Gagnarakningarhnappurinn í efstu stiku gefur fljótlegan aðgang að eftirfarandi stillingum: Sýningarham, sýna hnappanotkunartalningu, sýna sýningartalningu og stjórna gögnum.

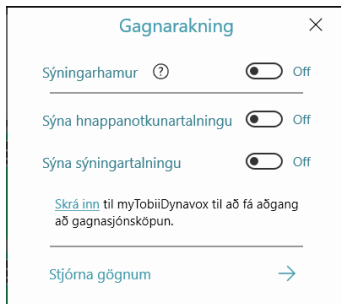

13.14.3 Sýna hnappanotkunartalningu

Þegar hann er virkjaður sýna hnappar hvítt merki með fjölda skipta sem hnappurinn var valinn af notanda (á meðan vöktun hnappanotkunar var virkjuð) í tilteknum tímaramma. Sjálfvalinn tímarammi er allt.

Virkja sýna hnappanotkunartalningu (í notandastillingum)

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Gagnarakning** flokkur.
4. Setja **Sýna hnappanotkunartalningu** á kveikt.



Til að breyta tímabili notkunartalningar, skaltu velja **Tímabil**, og nota síðan fellilistavalmyndina eða reitina með upphafs- og lokadagsetningu/-tíma.

Virkja sýna hnappanotkunartalningu (í gegnum gagnarakningarhnappinn í efstu stiku)




Til að virkja gagnarakningar hnappinn í efstu stiku, sjá kafla 13.14.2 *Sýna hnappa á efstu stiku*.



1. Veldu  **Gagnarakning** hnappinn í efstu stiku.
2. Virkja **Sýna hnappanotkunartalningu**.



Til að breyta tímabili notkunartalningar, skaltu velja **Tímabil**, og nota síðan fellilistavalmyndina eða reitina með upphafs- og lokadagsetningu/-tíma.

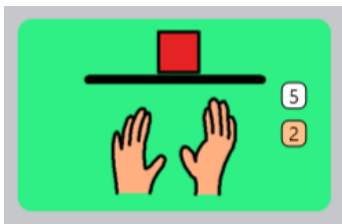

Skýringarmynd 13.3 Hnappur sýnir notkunartalningu (hvítt) og sýningartalningu (appelsínugult).

13.14.4 Sýna sýningartalningu

Þegar hann er virkjaður sýna hnappar appelsínugult merki með fjölda skipta sem hnappurinn var valinn í sýningarham (á meðan vöktun hnappanotkunar var virkjuð) í tilteknum tímaramma. Sjálfvalinn tímarammi er allt.

Virkja sýna sýningartalningu (í notandastillingum)



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Gagnarakning** flokkur.
4. Setja **Sýna sýningartalningu** á kveikt.



Til að breyta tímabili sýningartalningar, skaltu velja **Tímabil**, og nota síðan fellilistavalmyndina eða reitina með upphafs- og lokadagsetningu/-tíma.

Virkja sýna sýningartalningu (í gegnum gagnarakningarhnappinn í efstu stiku)



Til að virkja gagnarakningar hnappinn í efstu stiku, sjá kafla 13.14.2 *Sýna hnappa á efstu stiku*.



1. Veldu **Gagnarakning** hnappinn í efstu stiku.
2. Virkja **Sýna sýningartalningu**.



Til að breyta tímabili sýningartalningar, skaltu velja **Tímabil**, og nota síðan fellilistavalmyndina eða reitina með upphafs- og lokadagsetningu/-tíma.

13.14.5 Stjórna gögnum

Endurstilla hnappanotkunartalningu og sýningartalningu á núll fyrir núverandi síðu, hnappa á skilaboðaslá, hnappa á tækjastiku eða allt síðusettið.



Endurstilling hnappanotkunartalningar eyðir ekki fyrri notkunargögnum. Ef þú vilt eyða öllum notkunargögnum sem hafa verið geymd á mytobiidynavox reikningi þínum varanlega, skaltu nota vefvafra og fara á mytobiidynavox.com > *Snap* > *notkunargögn*.

Endurstilla notkunartalningu (í notandastillingum)



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu **Gagnarakning** flokkur.

4. Veldu **Stjórna gögnum**.
5. Veldu svæðið sem þú vilt endurstilla hnappanotkunartalningu og sýningartalningu á núll.
6. Veldu **Endurstilla** til að endurstilla notkunar- og sýningartalningu fyrir valið svæði. Til að hætta við endurstillingar-
aðgerð velurðu hætta við.

Endurstilla notkunartalningu (í gegnum gagnarakningarhnappinn í efstu stiku)



Til að virkja gagnarakningar hnappinn í efstu stiku, sjá kafla *13.14.2 Sýna hnappa á efstu stiku*.



1. Veldu **Gagnarakning** hnappinn í efstu stiku.
2. Veldu **Stjórna gögnum**.
3. Veldu svæðið sem þú vilt endurstilla hnappanotkunartalningu og sýningartalningu á núll.
4. Veldu **Endurstilla** til að endurstilla notkunar- og sýningartalningu fyrir valið svæði. Til að hætta við endurstillingar-
aðgerð velurðu hætta við.

14 Kerfisstillingar

14.1 Kjörstillingar

14.1.1 Aðgangskóði

Þegar þetta er virkjað þarf fjögurra stafa aðgangskóða til að fara í breytingarham, leitarham og samstillingu. Virkjun aðgangskóða getur hjálpað til við að koma í veg fyrir óheimilar breytingar á síðusetti og stillingum.

Virkja aðgangskóða



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Kerfi** flippann.
3. Stilltu nota aðgangskóðarofann á **Kveikt**.
4. Settu inn fjögurra stafa aðgangskóða sem aðeins þú veist og er ekki auðvelt að giska á.

5. Settu inn aðgangskóðann aftur til að staðfesta hann.
6. Þegar þú virkjar nota aðgangskóða, er aðgangskóði sjálfvalið virkjaður fyrir breytingarham, samstillingu og leitarham. Stilltu hann á slökkt fyrir hvern sem er af þessum eiginleikum ef þú vilt að þeir séu aðgengilegir án aðgangskóða.



Ef aðgangskóði er virkjaður og samstillingareiginleikaaðgangskóði er óvirkur mun samstillinga aðeins virka í sækja eingöngu ham. Þegar þú samstillir í sækja eingöngu ham færðu breytingar á síðusetti (sem gerðar eru á öðrum tækjum) en sendir engar breytingar á síðusettinu sem gerðar voru á núverandi tæki.

7. Þegar þú ferð úr breytingarham þarf aðgangskóða til að fá aðgang að kaupum í forriti og ef hann er virkjaður, breytingarham, samstillingu og/eða leitarham.



Ef þú hefur þegar virkjað aðgangskóða getur þú endurstilt aðgangskóða með því að velja  **Breyta** hnappinn.

Ef þú gleymir aðgangskóðanum skaltu nota master-aðgangskóða (0250) til að fá aðgang að breytingarham og setja inn nýjan aðgangskóða tafarlaust.

14.1.2 Skjástillingar (aðeins fyrir Windows)

Þegar heilskjáhamur er virkjaður fyllir Snap hugbúnaðurinn út í allan skjáinn á tækinu. Þegar heilskjáhamur er óvirkur keyrir Snap hugbúnaðurinn inn stærðarstillanlegum glugga.

14.1.3 Breytingarstilling tungumáls

Veldu tungumál fyrir viðmót breytingarhams.

14.2 Tæki



Tækjahlutinn er aðeins tiltækur á Tobii Dynavox I-13 og I-16 tækjum.

14.2.1 Stillingar félagsglugga

Félagaglugginn er skjár aftan á Tobii Dynavox I-13 og I-16 tækjunum. Félagaglugginn upplýsir tjáskiptafélagann að notandi sé að undirbúa sig undir að tala og sýnir texta sem félaginn les.



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Kerfi** flipann.
3. Veldu **Tæki**.
4. Veldu úr valkostum félagsglugga:
 - **Sýna skilaboðagluggatexta** — sýna skilaboðagluggatexta í félagaglugga í rauntíma.
 - **Sýna texta sem verið er að tala** — sýna aðeins texta í félagaglugga þegar hann er talaður. Á meðan verið er að semja í skilaboðaglugga sýnir félagaglugginn röð punkta sem sýnir að notandi undirbýr skilaboð sín. Þegar skilaboðaglugginn er talaður skrunar félagaglugginn textanum um leið og hann er talaður.



Félagaglugginn sýnir bara texta. Hann sýnir ekki tákn.

5. Veldu í stöðu útlits félagsglugga:
 - **Spegill** — sýnir minni útgáfu af félagaglugganum í efstu stiku.
 - **Tákn** — sýna tákn þegar kveikt er á félagaglugga. Fela tákn þegar slökkt er á félagaglugga.
6. Setur straum félagsglugga á **Kveikt** eða **Slökkt**. Þegar straumur félagsglugga er stilltur á slökkt, sýnir hann ekki neinn texta.



Þú getur einnig notað aðgerðir hnapps til að stjórna birtustigi skjás félagsglugga og kveikja og slökkva á félagsglugga. Sjá hluta 8.6.2 *Virkt efni* og 8.7 *Aðgerðir hnapps*.

14.3 Búð

Kauptu hluti og stjórnaðu virkjunarlyklinum þínum.

14.3.1 Innkaup



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Kerfi** flipann.
3. Veldu **Búð**.
4. Veldu **Kaupa** á hlutum sem vilt kaupa.
5. Kláraðu öruggu viðskiptin þín.



Internettenging er nauðsynleg til að kaupa í búðinni.

14.3.2 Endurheimta innkaup (Aðeins Windows)

Ef keyptu hlutirnir þínir birtast ekki í Windows útgáfunni af Snap Core First forritinu, skaltu endurheimta kaupin með virkjunarlyklinum þínum.

 Internettenging er nauðsynleg til að endurheimta innkaup.

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Kerfi** flipann.
3. Veldu **Búð**.
4. Veldu **Endurheimta innkaup**.
5. Sláðu inn **Virkjunarlykilinn** þinn.
6. Veldu **Búð**.

14.3.3 Afvirkja lykil (Aðeins Windows)

Fjarlægðu virkjunarlykilinn þinn úr núverandi Windows tæki til þess að hægt sé að nota hann á öðru tæki.

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Kerfi** flipann.
3. Veldu **Búð**.
4. Veldu **Afvirkja lykil**. Staðfestingargluggi mun opnast.
5. Staðfestu að þú viljir afvirkja lykilinn þinn á þessu tæki.

14.4 Táknasett

14.4.1 Leitarstillingar

Þegar örugg tákneit er virkjuð birtast berorð tákni ekki í tákneit, (táknmynduðum) skilaboðaglugga eða leitarham. Þegar örugg tákneit er óvirk, notar tákneit, skilaboðagluggátákn og leitarhamur öll tiltæk tákni.

14.4.2 Uppsett og niðurhalanleg tákni

Táknasettin sem talin eru upp í uppsett tákni hlutanum eru táknasett sem eru þegar uppsett og tiltæk á tækinu.

Til að eyða uppsettu táknasetti skaltu velja  **Eyða** hnappinn og velja síðan **Eyða** til að staðfesta.

 Snap kjarnatáknum er ekki hægt að eyða.

Táknasettin sem talin eru upp í niðurhalanleg tákni hlutanum eru ókeypis táknasett sem eru ekki þegar uppsett á tækinu. Til að hlaða niður og setja upp táknasett skaltu velja **Niðurhal** við hliðina á viðeigandi táknasetti.

 Þú verður að vera með virka nettengingu til að ná í táknasett.

 Sum táknasett frá þriðja aðila má kaupa í gegnum verslunina. Sjá hluta 14.3 **Búð**.

14.4.3 Endurraða táknasettum


Röð tákneitarniðurstaðna er ákvörðuð af röð táknasetta í uppsettum táknaalista. Ef þú notar, til dæmis, mest há-andstæðutákni í síðusetti þínu, gætir þú fært há-andstæðutáknasettið efst í lista yfir uppsett táknasett til að forgangsraða há-andstæðutáknum (þegar þau eru tiltæk) í tákneit.

1. Veldu  **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Kerfi** flipann.

3. Veldu **Táknasett** flokkur.

4. Veldu og haltu niðri haldi táknasetts í lista yfir uppsett ták.

5. Dragðu táknasettið í nýja staðsetningu á listanum.

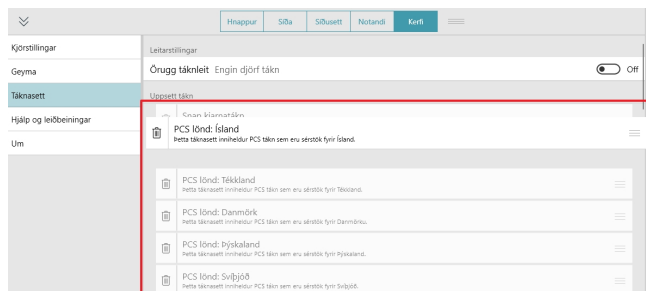

14.5 Hjálp og leiðbeiningar

14.5.1 Myndbönd

Horfðu á myndbönd til að læra meira um notkun Snap Core First.

14.5.2 Pathways fyrir Core First



Pathways fyrir Core First er ókeypis forrit sem kennir þér öflugustu aðferðirnar við að nota Snap Core First fyrir tjáskipti, læsi, hegðunarstuðning og fleira! Fylgdu tenglunum í þessum kafla til að læra meira.

14.5.3 Snögg yfirferð

Endurræstu snögga yfirferð til að læra að nota Snap hugbúnaðinn.

14.5.4 Ytri hjálp

Fáðu aðgang að stuttum leiðarvísi, notandaleiðbeiningum, síðusett leiðarvísu, frekari myndböndum, þekkingargrunni á netinu og leyfissamningi endanlegs notanda.

14.6 Um

Snap Core First útgáfuupplýsingar.

14.6.1 Hugbúnaðaruppfærslur



Gildir eingöngu fyrir Windows

Snap Core First forritið framkvæmir reglulegar sjálfvirkar uppfærslur.

Til að athuga handvirkt hvort ný útgáfa sé komin og hala niður uppfærslunni:



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Kerfi** flipann.
3. Veldu **Kjörstillingar** flokkinn.
4. Ef uppfærsla er fánleg mun hún birtast fyrir neðan EAN númerið. Til að fá uppfærða útgáfu skal velja **Setja upp uppfærslu**.

Höfundarréttur ©Tobii AB (publ). Ekki eru allar vörur og þjónustur fáanlegar á öllum mörkuðum. Tæknilýsingar geta breyst án fyrirvara. Öll vörumerki eru í eigu hlutaðeigandi eiganda.

Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækið þitt

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörunni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: www.TobiiDynavox.com/support-training

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluaðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá: www.TobiiDynavox.com/contact