

Karty ćwiczeń



Spis treści

1	Często zadawane pytania
2	Glosariusz TD Snap® Core First
4	Spróbujmy go użyć!
6	Aktywność: Czytanie książki
6	Aktywność: Granie w grę
7	Aktywność: Oglądanie sportu
7	Aktywność: Wychodzenie do restauracji
8	Korzystanie z Asystenta Google razem z TD Snap®
10	Edytowanie wsparcia wizualnego
11	Zmiana rozmiarów tabeli
12	Dodatkowe wsparcie

Często zadawane pytania

Co to jest Core First?

Core First to zbiór narzędzi komunikacyjnych umożliwiających porozumiewanie się w sposób sprawny i precyzyjny. Zestaw stron rozwija się razem z użytkownikiem i można go z łatwością zindywidualizować. Bazuje on na kluczowych słowach, małym zbiorze złożonym z elastycznych użytkowo słów, które stanowią ok. 80% wszystkich wyrazów używanych w wielu codziennych sytuacjach przez każdego i każdą z nas.

Jakie cele mają poszczególne narzędzia?

Narzędzia w Core First współdziałają na rzecz zwiększenia zaangażowania (Tematy i Częste zwroty), nauki czytania i pisania (Kluczowe słowa, Listy słów i Klawiatura) oraz Rozwoju (tabele różnych rozmiarów).

Jakie korzyści płyną z posiadania wsparcia wizualnego?

Wsparcie wizualne pomaga osobom zrozumieć, co się dzieje podczas aktywności, jakie są oczekiwania i daje możliwość samoregulacji. Wsparcie w Core First obejmuje: „Teraz i potem”, Miniharmonogram, Historię towarzyską, Dialogi oraz Minutnik. Wsparcie wizualne można znaleźć na każdej stronie Tematu.

Jak działają Tematy?

Tematy wspomagają interakcje w określonych środowiskach lub dotyczące konkretnych wątków. Są to przede wszystkim komunikaty bazujące na wyrażeniach, które pomagają danej osobie szybko i sprawnie się porozumieć. Dla jak najlepszych efektów zalecamy zindywidualizowanie Tematów o komunikaty dotyczące konkretnej osoby.

Tematy pozwalają osobom uczestniczyć w wartościowych rozmowach i lepiej zaprezentować swoją wiedzę niż mogą na to pozwalać ich umiejętności pisania i czytania w danym języku.

Jak działa Pasek narzędzi?

Pasek narzędzi daje dostęp do wszystkich narzędzi komunikacyjnych, które mogą okazać się potrzebne, na każdej stronie. Przyciski na pasku narzędzi można ukrywać lub dodawać.


Jak mogę rozbudować słownictwo?

Istnieją dwie różne metody zwiększania słownictwa w Core First. Pierwszym jest zwiększenie rozmiaru tabeli. Słowa pozostają w relatywnie tych samych pozycjach, jednak konieczne może być dokonanie pewnych korekt. Drugim sposobem poszerzenia słownictwa jest rozpoczęcie od tabeli w większym rozmiarze niż wydaje się konieczne oraz ukrycie przycisków. W miarę poprawy biegłości przez użytkownika można odkryć przyciski, aby rozbudować jego/jej słownictwo.

Glosariusz TD Snap® Core First


Kluczowe słowa

Mały zbiór często używanych słów, które można łączyć w celu złożenia unikalnych komunikatów.

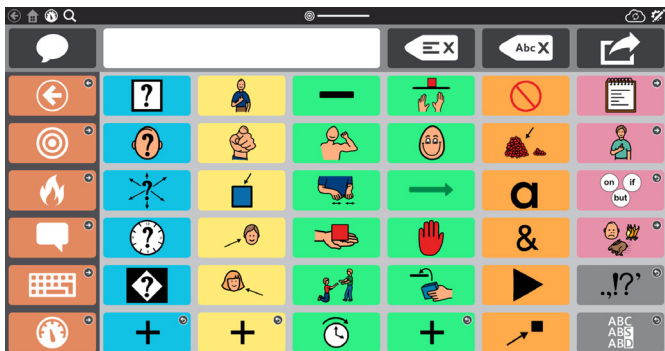

Częste zwroty

Krótkie słowa i wyrażenia używane na co dzień do podtrzymywania rozmowy, zwracania uwagi lub komentowania.

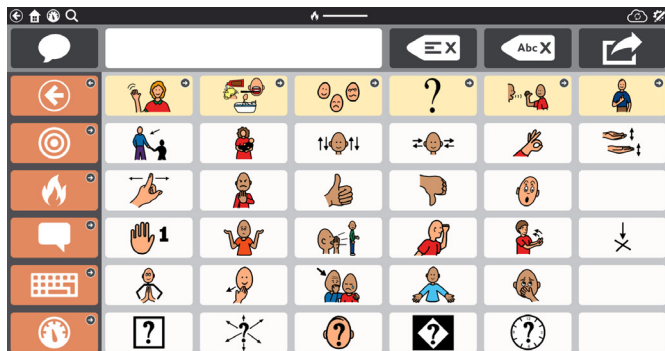


Tematy

Wstępnie zapisane komunikaty odnoszące się do konkretnych sytuacji lub warunków, zorganizowane według celu komunikacyjnego.



Pasek narzędzi

Pasek narzędzi to miejsce, w którym znajdują się wszystkie narzędzia komunikacyjne. Można tam znaleźć takie narzędzia, jak Słowa Kluczowe, Tematy i Częste zwroty.

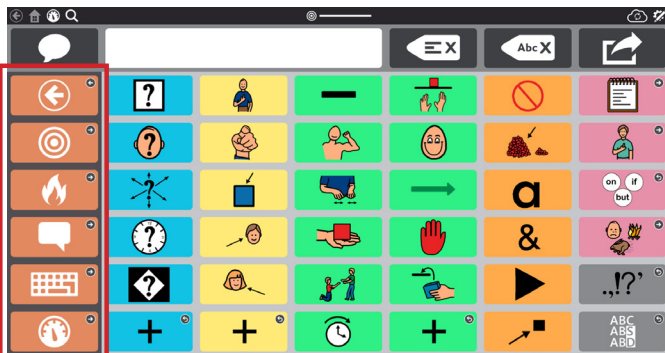

Listy słów i Słowa w temacie

Listy słów uporządkowane według kategorii (np. jedzenie, zwierzęta itp.). Słowa w temacie są uporządkowane według kategorii i odnoszą się do konkretnego tematu.





Pomocne słowa

Pomocne słowa można znaleźć w każdym Temacie. Pomagają użytkownikom w samoregulacji przez bardziej konkretne, trwałe i jasne przedstawienie oczekiwań.

Teraz... potem

Pokazuje użytkownikowi, co stanie się najpierw, a następnie co stanie się później.




Miniharmonogram

Pokazuje kolejność aktywności z małego zestawu.




Sytuacje społeczne (dialog)

Historie opisujące sytuację i uznające, w jaki sposób osoba może ją odczuć i pozytywnie sobie z nią poradzić.

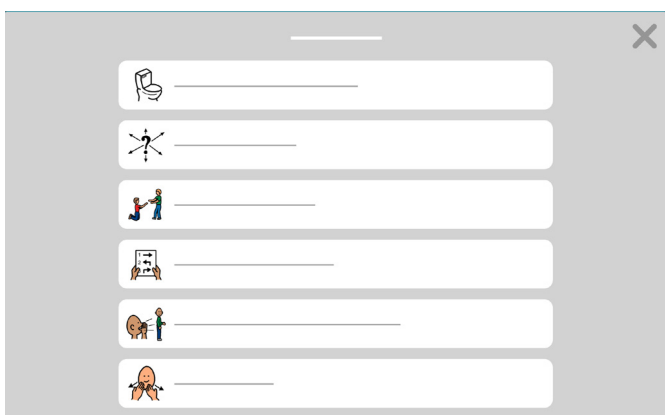


Minutnik

Pokazuje ile czasu pozostało do końca aktywności.

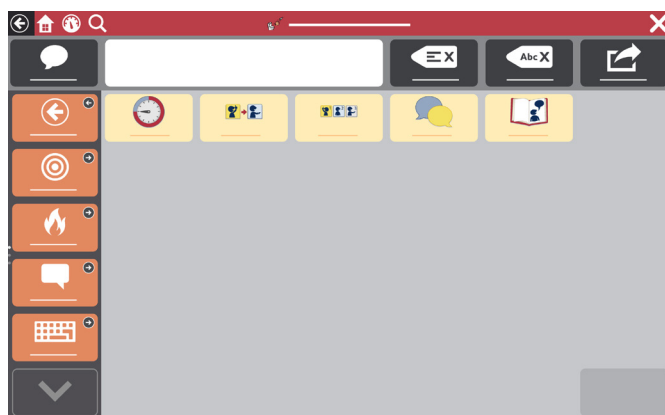

Pulpit

Pulpit nawigacyjny zawiera elementy sterujące urządzeniem, np. głośność i piloty. Można do niego wejść z poziomu paska narzędzi.

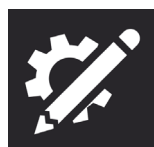

Narzędzie edycji

Służy do wprowadzania zmian w zawartości lub ustawieniach.

Spróbujmy go użyć!



Na kolejnych stronach znajdziesz kilka dobrych aktywności na dobry początek. Wybierz takie aktywności, które będą motywowały i stale angażowały. Nie wahaj się powtarzać aktywności, gdyż powtarzanie sprzyja nauce. Żeby być dobrym partnerem w komunikacji, pamiętaj o poniższych strategiach, które pozwolą Ci stworzyć środowisko sprzyjające skutecznemu porozumiewaniu się.



Wykorzystuj okazje

Identyfikuj pory dnia, w których dana osoba może uczyć się i ćwiczyć swoje umiejętności komunikacji. Na przykład, pomóż jej używać TD Snap® do zakomunikowania wyboru, co chce zjeść lub jaki film chce obejrzeć.



Stwarzaj pozytywne środowisko dla komunikacji

Przyjmij te postawy i strategie zachęcające do komunikowania się.

- **Wychodź z założenia, że druga strona ma umiejętności**
"Wiem, że dasz radę".
- **Koncentruj się na używaniu, nie na testowaniu**
Zamiast „Znajdź książkę”, powiedz „Pora coś poczytać. Jaką książkę czytamy?”
- **Reaguj na wszelkie formy komunikacji**
Osoba ucząca się: uśmiecha się do Ciebie. Partner: „Cześć i czołem!”
- **Czekaj**
Zanim partner pomoże znaleźć właściwe słownictwo, liczy do pięciu.



Modelowanie użytkownika AAC

Dowodzono, że modelowanie jest najlepszym sposobem, aby nauczyć kogoś komunikowania się przy użyciu AAC. Modelowanie oznacza dotykanie i używanie urządzenia tak, jakbyśmy rozmawiali i kontaktowali się z tą osobą.

- Modelowanie polega na pokazywaniu drugiej osobie, jak się ze sobą komunikować.
- Nie wymaga od nas naśladowania.
- Nie modeluj każdego wypowiedzanego słowa, lecz tylko słowa kluczowe.
- Modeluj, szukając słownictwa.
- Popęlanianie błędów jest OK. Błędy dają Ci szansę na modelowanie poprawek.
- Modelowanie to nie przepytwanie czy testowanie.



Obejrzyj wideo z demonstracją modelowania.

qrco.de/bbA7Ur



Wypatruj sukcesów

Sukces w komunikacji to coś więcej niż przekazanie przez daną osobę tego, co oczekujesz, kiedy i w sposób, jaki tego oczekujesz.

Sukcesem może być:

- Większa uwaga przykładana do interakcji
- Inicjowanie komunikacji
- Używanie większego słownictwa
- Dłuższe interakcje
- Większa radość z interakcji
- Większa niezależność w komunikacji



Nie popełniaj błędów początkującego użytkownika!

- Nie musisz tworzyć czegoś od nowa. Ramy są już opracowane przez nas. Dobrze zapoznaj się z tym, co oferuje TD Snap® Core First, a następnie dostosuj go do indywidualnych potrzeb użytkownika.
- Nie nakładaj nadmiernej presji na siebie, ani na użytkownika.
- Na samym początku wykonywanie każdego zadania z dużą dokładnością nie jest realistyczne. Popęlanianie błędów jest w porządku.

Aktywność: Czytanie książki



Materiały

- Temat Czytanie w TD Snap® Core First
- Ulubiona książka

Przygotowanie

Wybierz Tematy z Paska narzędzi. Odszukaj temat Czytanie i przejrzyj słownictwo zanim zaczniesz aktywność.



Kroki


- 1 Przedstaw książkę i pokaż jej okładkę. Powiedz, o czym książka może być.
- 2 Po przeczytaniu każdej strony zatrzymaj się i daj okazję do komunikacji.
- 3 W toku czytania zatrzymuj się, żeby coś skomentować lub zadać pytanie (np. Co sądzisz jak dotąd? Jest straszna? Uważam, że ten chłopiec się wystraszył.).
- 4 Gdy skończysz czytać książkę, nie przepytuj użytkownika. Zamiast tego zapytaj o wrażenia i przemyślenia na temat historii.



Pomocne wskazówki

- Jeśli w opowieści powtarza się jakieś zdanie, a Ty masz pusty przycisk na stronie, zaprogramuj to zdanie pod przyciskiem.
- Kliknij ten przycisk za każdym razem, gdy to zdanie się pojawi.
- Komunikaty, takie jak „Zmień stronę” i „Przeczytaj to jeszcze raz” są już zaprogramowane w urządzeniu.
- Komentuj wszystko, na co dziecko spojrzy lub pokaże w jego otoczeniu. Po skończeniu powtórz, jak świetnie się z Tobą porozumiało.
- Przejrzyj książkę jeszcze raz, tym razem koncentrując się na obrazkach. Zwróć uwagę na słowa występujące w urządzeniu, które pasują do obrazków i modeluj, klikając je.

Aktywność: Granie w grę

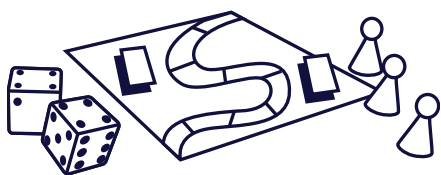

Materiały

- Temat Gry w TD Snap® Core First
- Ulubiona gra planszowa lub karciana

Pomysły na grę

Na ryby, Wojna, Bingo, Memory, Candyland

Przygotowanie

Wybierz Tematy z Paska narzędzi. Odszukaj temat Gry i przejrzyj słownictwo zanim zaczniesz aktywność.



Kroki


- 1 Przedstaw grę i omów zasady, jeśli wcześniej w nią nie graliście.
- 2 Zaczynaj grę z użyciem wcześniej przejrzanego słownictwa.
- 3 Róbcie sobie przerwy, żeby porozmawiać o przebiegu gry.
- 4 Po skończeniu rozgrywki poświęć trochę czasu na komentarze.



Pomocne wskazówki

- Sprawdź folder Słowa w grze w kategorii Słowa w temacie, żeby zapoznać się z szerszym słownictwem.
- Komunikaty, takie jak „Moja kolej”, „Zagrajmy jeszcze raz” czy „Nie lubię tej gry”, są już zaprogramowane w urządzeniu.
- Pozwól użytkownikowi pilnować kolejności (moja kolej, twoja kolej) przez wybór odpowiednich przycisków.

Aktywność: Oglądanie sportu

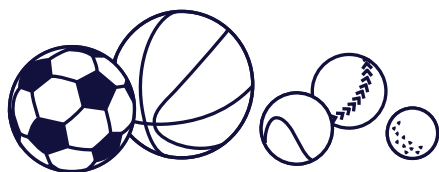

Materiały

- Temat Sporty w TD Snap® Core First
- Ulubione wydarzenie sportowe

Przygotowanie

Wybierz Tematy z Paska narzędzi. Odszukaj temat Sporty i przejrzyj słownictwo zanim zaczniesz aktywność.



Kroki


- 1 Przedstaw wydarzenie sportowe, które oglądacie i powiedz, jakie drużyny grają.
- 2 Pokaż, jak nawigować i aktywować przyciski, żeby w ciekawy sposób komentować trwający mecz.
- 3 Po zakończeniu aktywności omów wszelkie udane próby komunikacji (np. „Bardzo mnie ucieszyło, jak pokazałeś na piłkę, żeby powiedzieć, że ci się ona podoba”).



Pomocne wskazówki

- Użyj przycisku edycji, aby dodać ulubioną drużynę do przycisku z napisem „Ulubiona drużyna []”.
- Komunikaty, takie jak „Jest dzisiaj jakiś mecz?”, „Uwielbiam tę drużynę” czy „Oni są do bani” są już zaprogramowane w urządzeniu.
- Jeśli masz pusty przycisk, zaprogramuj jakiś fajny okrzyk swojej drużyny.

Aktywność: Wychodzenie do restauracji

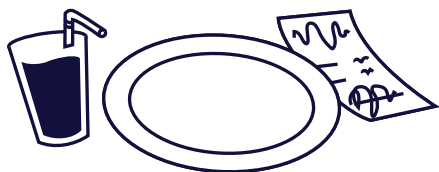

Materiały

- Temat Restauracja w TD Snap® Core First
- Ulubiona restauracja

Przygotowanie

Wybierz Tematy z Paska narzędzi. Odszukaj temat Restauracja i przejrzyj słownictwo zanim zaczniesz aktywność.



Kroki

- 1 Porozmawiajcie o wybraniu się do restauracji.
- 2 Modelowanie słownictwa możesz rozpocząć zanim jeszcze dotrzesz do restauracji. Na przykład, kliknij przycisk „Zjedźmy obiad na mieście”.
- 3 Gdy już będziecie w restauracji, modeluj z użyciem urządzenia przez cały czas trwania posiłku.
- 4 Po skończeniu posiłku omów wszelkie udane próby komunikacji (np. „Gdy nacisnęłaś <więcej>, wiedziałam, żeby podać bułki!”).



Pomocne wskazówki

- Komunikaty, takie jak „Może zjedźmy na mieście?” czy „Uwielbiam ten lokal” są już zaprogramowane w urządzeniu.
- Zachęcaj wszystkich przy stole, łącznie z obsługą, do zaangażowania się.

Korzystanie z Asystenta Google razem z TD Snap®


Strony Asystenta Google dostępne w TD Snap® są uporządkowane według funkcji. Przyciski na tych stronach pozwalają zarządzać codziennymi zadaniami, odtwarzać muzykę, zadawać pytania, a nawet sterować domowymi urządzeniami przy pomocy Asystenta Google.

Aby znaleźć strony Asystenta TD Snap®:

- 1 Na pasku narzędzi kliknij przycisk **Pulpit**.



- 2 Kliknij przycisk **Asystent Google**.

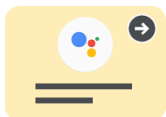

Ikony wskazują na sprzęt, z którym trzeba użyć tego przycisku.



Nie jest wymagany żaden sprzęt dodatkowy.



Wymagana jest centralka Google Nest lub głośnik współpracujący z Asystentem Google.



Wymagane jest inteligentne gniazdko, oświetlenie lub termostat.

Wskazówki dla udanego korzystania:

- Odtwarzanie muzyki bardzo głośno może utrudnić jej wyłączenie lub wydawanie innych poleceń.
- Jeśli system Google nie zareaguje na polecenie zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj inaczej je sformułować lub użyć konkretniejszego języka.
Przykład: Jeżeli „Ok Google, włącz światło” nie zadziała, spróbuj powiedzieć „Ok Google, włącz światło w pokoju rodzinnym”.
- Pamiętaj, że korzystając z zewnętrznego głośnika Google, polecenie musisz poprzedzić frazą „Ok Google”.
- Upewnij się, że masz jak wezwać pomoc i masz system zapasowy do obsługi funkcji automatycznych w domu.
- Najlepiej sprawdzają się te gry, które nie wymagają określonych odpowiedzi i dają wystarczająco dużo czasu na reakcję.
- Odtwarzanie muzyki bardzo głośno może utrudnić jej wyłączenie lub wydawanie innych poleceń.
- Jeśli system Google nie zareaguje na polecenie zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj inaczej je sformułować lub użyć konkretniejszego języka.
Przykład: Jeżeli „Ok Google, włącz światło” nie zadziała, spróbuj powiedzieć „Ok Google, włącz światło w pokoju rodzinnym”.
- Pamiętaj, że korzystając z zewnętrznego głośnika Google, polecenie musisz poprzedzić frazą „Ok Google”.
- Upewnij się, że masz jak wezwać pomoc i masz system zapasowy do obsługi funkcji automatycznych w domu.
- Najlepiej sprawdzają się te gry, które nie wymagają określonych odpowiedzi i dają wystarczająco dużo czasu na reakcję.

Najczęściej zadawane pytania na temat Asystenta Google

Czy muszę mieć aplikację Google Home?

Tak, jeżeli zakupiono dodatkowe wyposażenie, musisz mieć w telefonie lub tablecie zainstalowaną aplikację Google Home (np. Google Nest Mini, inteligentne gniazdka itd.).

Czy muszę mieć Konto Google?

Tak, do obsługi Asystenta Google wymagane jest bezpłatne Konto Google. Konto Google musisz połączyć z TD Snap® (*Edycja > Użytkownik > Połączenie z Google*).

Czy mogę słuchać muzyki?

Tak, musisz skorzystać z zewnętrznego głośnika Google (np. Google Nest Mini, Google Home Nest itd.) i zadbać o to, żeby urządzenie można było usłyszeć przy grającej muzyce.

Czy mogę sterować oświetleniem w domu?

Tak, przy użyciu właściwego sprzętu możesz kontrolować światła w swoim domu.

Mam w domu urządzenie typu smart. Czy mogę nim sterować przy pomocy Asystenta Google?

Tak. Zapoznaj się z instrukcją dołączoną do urządzenia inteligentnego, aby dowiedzieć się szczegółowych informacji.

Czy mogę wykonywać połączenia awaryjne przy użyciu Asystenta Google?

Nie. Asystent Google NIE zadzwoni po służby ratownicze.

Jak mogę uzyskać wsparcie?

W razie problemów z oprogramowaniem TD Snap®, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej Tobii Dynavox lub Includo.

W przypadku problemów z urządzeniami inteligentnymi wejdź na stronę internetową producenta.

Rozwiązywanie problemów w Google Support

qrco.de/GoogleAssistantExplore

qrco.de/GoogleAssistantHelp

qrco.de/GoogleNestHelp




Przeczytaj pełną instrukcję Asystenta Google dla TD Snap®.

qrco.de/gatdsa

Edytowanie wsparcia wizualnego


- 1 Odszukaj stronę Wsparcie zawierającą wsparcie wizualne, które chcesz edytować.

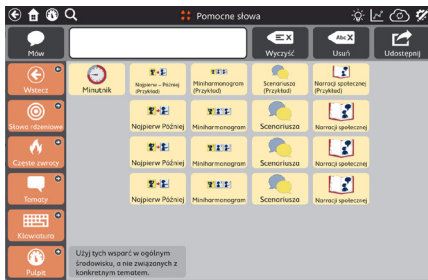

- 2 Kliknij przycisk **Edytuj**.




- 3 Kliknij przycisk wsparcia, które chcesz edytować.

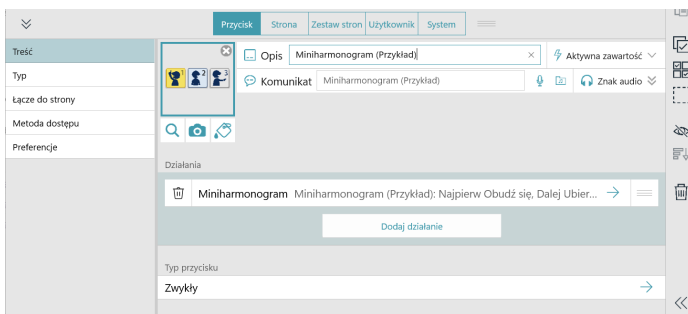

- 4 Wybierz akcję (Miniharmonogram, Minutnik, Najpierw Później lub Dialog).

- 5 Kliknij ikonę ołówka w dowolnym wierszu, aby dokonać zmian.

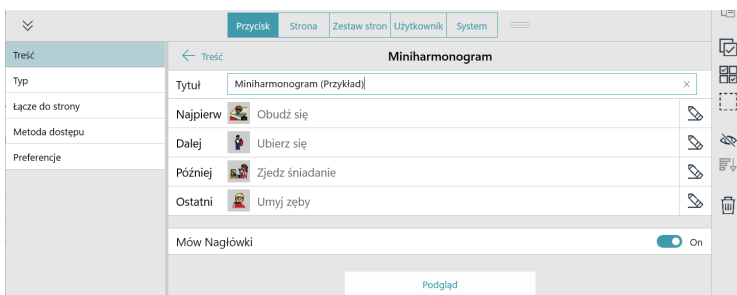

- 6 Kliknij przycisk Podgląd na dole panelu edycji wsparcia, aby zobaczyć zmiany Wsparcia wizualnego przed ich wprowadzeniem.

- 7 Po zakończeniu edycji kliknij przycisk **Gotowe**.


Zmiana rozmiarów tabeli

Zalecamy wzięcie pod uwagę przede wszystkim zdolności użytkownika do dokładnego wybierania przycisków. Fizyczne interakcje z urządzeniem komunikacyjnym wymagają praktyki. Zacznij od mniejszego rozmiaru tabeli. W miarę jak użytkownik zacznie przyzwyczajać się do obsługi urządzenia, możliwe będzie przejście na większe tabele. Rozmiary tabeli jest łatwo zmienić, a zestaw stron TD Snap® Core First jest opracowany tak, aby położenie słownictwa było spójne w różnych rozmiarach.

- 1 Kliknij przycisk **Edytuj**.



- 2 Kliknij kartę **Zestaw stron**.

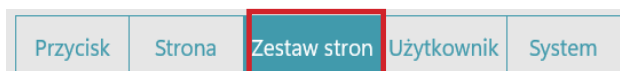

- 3 Kliknij przycisk **Rozmiar tabeli**.



- 4 Wybierz opcję ze Zoptymalizowanych rozmiarów tabeli.

- 5 Kliknij przycisk **Gotowe**.



Zeskanuj ten kod, żeby obejrzeć krótkie wideo na temat zmiany rozmiaru tabeli.

qrco.de/bbA7X9

Dodatkowe wsparcie



Strona wsparcia TD Snap®

qrco.de/SnapHelp



Społeczność TD na Facebooku

qrco.de/TDFB



Pomoc techniczna

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Tobii Dynavox w celu uzyskania wsparcia technicznego.

qrco.de/bgBNdZ

Dowiedz się, jak edytować przyciski, tworzyć kopie zapasowe i udostępniać Zestawy stron oraz korzystać z innych funkcji TD Snap®:



Karty ćwiczeń TD Snap® – Podstawy

qrco.de/bgBOWm



Instrukcja obsługi TD Snap®

qrco.de/bgBOBV