

## Informacije o opozivu TD Navio

### Priprema

Ovaj dokument opisuje kako se pripremiti za popravke nakon opoziva vašeg TD Navio Midi ili TD Navio Maxi uređaja. Slijedite upute za izradu sigurnosne kopije podataka na vašem uređaju i komunikacijskoj aplikaciji, zaštitite svoje osobne podatke i pripremite alternativne opcije komunikacije.

Kada ste dovršili korake u odjeljku Priprema, prijedite na *Pokrenite postupak popravka, stranica 8*

Ako trebate pomoć, obratite se podršci. Znamo da ovo zahtijeva vrijeme i trud, i tu smo da pomognemo.

## OBAVJEŠTENJE

### Spriječite gubitak podataka

Vaš uređaj može biti resetiran tijekom procesa popravka. U slučaju resetiranja, svi će se osobni podaci i postavke na uređaju izbrisati. Odgovornost korisnika je izraditi sigurnosnu kopiju podataka s uređaja prije nego što ga pošalje na popravak. Neuspjeh u tome može rezultirati trajnim gubitkom podataka. Pažljivo slijedite korake u ovom dokumentu kako biste napravili sigurnosnu kopiju svog uređaja.

### Zabilježite podatke o korisničkom računu

1. Zabilježite svoj Apple ID i lozinku.
2. Zabilježite svoje korisničko ime i lozinku za myTobiiDynavox.

### Kako mogu stvoriti myTobiiDynavox račun?

Idite na [Stvori myTobiiDynavox račun](#) kako biste stvorili myTobiiDynavox račun.

### Sigurnosno kopirajte svoj TD Navio pomoću iPadOS-a



Informacije mogu prikazivati grafike iz sustava iOS, ali upute su iste i za iPadOS.

Sigurnosno kopiranje uređaja izrađuje kopiju podataka vašeg uređaja, uključujući osobne datoteke, aplikacije, fotografije i postavke. Sigurnosna datoteka može se koristiti za vraćanje uređaja u stanje u kojem je bio nakon resetiranja. Da biste izradili sigurnosnu kopiju za svoj TD Navio, slijedite ove upute:

Jezik	Veza
English	<a href="https://support.apple.com/en-us/108366">https://support.apple.com/en-us/108366</a>
German	<a href="https://support.apple.com/de-de/108366">https://support.apple.com/de-de/108366</a>
French	<a href="https://support.apple.com/fr-fr/108366">https://support.apple.com/fr-fr/108366</a>
Spanish	<a href="https://support.apple.com/es-mx/108366">https://support.apple.com/es-mx/108366</a>
Dutch	<a href="https://support.apple.com/nl-nl/108366">https://support.apple.com/nl-nl/108366</a>
Swedish	<a href="https://support.apple.com/sv-se/108366">https://support.apple.com/sv-se/108366</a>
Norwegian	<a href="https://support.apple.com/no-no/108366">https://support.apple.com/no-no/108366</a>
Danish	<a href="https://support.apple.com/da-dk/108366">https://support.apple.com/da-dk/108366</a>
Pojednostavljeni kineski	<a href="https://support.apple.com/zh-cn/108366">https://support.apple.com/zh-cn/108366</a>

### Podrška za uređaj Tobii Dynavox

#### Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu za podršku za svoj uređaj Tobii Dynavox. Ona sadrži ažurne informacije o rješavanju problema, kao i praktične savjete i upute u vezi s proizvodom. Potražite internetske stranice naše korisničke podrške: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Obratite se svom savjetniku za opremu ili distributeru

Za pitanja ili probleme u vezi s vašim proizvodom kontaktirajte svog savjetnika za opremu Tobii Dynavox ili ovlaštenog distributera koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati s vašim osobnim postavkama i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi s proizvodom. Za kontakt podatke pogledajte <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Japanese	<a href="https://support.apple.com/ja-jp/108366">https://support.apple.com/ja-jp/108366</a>
Italian	<a href="https://support.apple.com/it-it/108366">https://support.apple.com/it-it/108366</a>
Finnish	<a href="https://support.apple.com/fi-fi/108366">https://support.apple.com/fi-fi/108366</a>
Arabic	<a href="https://support.apple.com/ar-sa/108366">https://support.apple.com/ar-sa/108366</a>
Bugarski	<a href="https://support.apple.com/bg-bg/108366">https://support.apple.com/bg-bg/108366</a>
Poljski	<a href="https://support.apple.com/pl-pl/108366">https://support.apple.com/pl-pl/108366</a>
Slovenski	<a href="https://support.apple.com/sl-si/108366">https://support.apple.com/sl-si/108366</a>
Estonski	<a href="https://support.apple.com/et-ee/108366">https://support.apple.com/et-ee/108366</a>
Portugalski	<a href="https://support.apple.com/pt-pt/108366">https://support.apple.com/pt-pt/108366</a>
Croatian	<a href="https://support.apple.com/hr-hr/108366">https://support.apple.com/hr-hr/108366</a>
Icelandic	<a href="https://support.apple.com/is-is/108366">https://support.apple.com/is-is/108366</a>
Hebrew	<a href="https://support.apple.com/he-il/108366">https://support.apple.com/he-il/108366</a>

## Povežite svoj TD Navio na Wi-Fi.



Informacije mogu prikazivati grafike iz sustava iOS, ali upute su iste i za iPadOS.

Da biste povezali svoj TD Navio na Wi-Fi, slijedite ove upute:

Jezik	Veza
English	<a href="https://support.apple.com/en-us/111107">https://support.apple.com/en-us/111107</a>
German	<a href="https://support.apple.com/de-de/111107">https://support.apple.com/de-de/111107</a>
French	<a href="https://support.apple.com/fr-fr/111107">https://support.apple.com/fr-fr/111107</a>
Spanish	<a href="https://support.apple.com/es-mx/111107">https://support.apple.com/es-mx/111107</a>
Dutch	<a href="https://support.apple.com/nl-nl/111107">https://support.apple.com/nl-nl/111107</a>
Swedish	<a href="https://support.apple.com/sv-se/111107">https://support.apple.com/sv-se/111107</a>
Norwegian	<a href="https://support.apple.com/no-no/111107">https://support.apple.com/no-no/111107</a>
Danish	<a href="https://support.apple.com/da-dk/111107">https://support.apple.com/da-dk/111107</a>
Pojednostavljeni kineski	<a href="https://support.apple.com/zh-cn/111107">https://support.apple.com/zh-cn/111107</a>
Japanese	<a href="https://support.apple.com/ja-jp/111107">https://support.apple.com/ja-jp/111107</a>
Italian	<a href="https://support.apple.com/it-it/111107">https://support.apple.com/it-it/111107</a>
Finnish	<a href="https://support.apple.com/fi-fi/111107">https://support.apple.com/fi-fi/111107</a>
Arabic	<a href="https://support.apple.com/ar-sa/111107">https://support.apple.com/ar-sa/111107</a>
Bugarski	<a href="https://support.apple.com/bg-bg/111107">https://support.apple.com/bg-bg/111107</a>
Poljski	<a href="https://support.apple.com/pl-pl/111107">https://support.apple.com/pl-pl/111107</a>
Slovenski	<a href="https://support.apple.com/sl-si/111107">https://support.apple.com/sl-si/111107</a>
Estonski	<a href="https://support.apple.com/et-ee/111107">https://support.apple.com/et-ee/111107</a>
Portugalski	<a href="https://support.apple.com/pt-pt/111107">https://support.apple.com/pt-pt/111107</a>
Croatian	<a href="https://support.apple.com/hr-hr/111107">https://support.apple.com/hr-hr/111107</a>

## Podrška za uređaj Tobii Dynavox

### Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu za podršku za svoj uređaj Tobii Dynavox. Ona sadrži ažurne informacije o rješavanju problema, kao i praktične savjete i upute u vezi s proizvodom. Potražite internetske stranice naše korisničke podrške: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

### Obratite se svom savjetniku za opremu ili distributeru

Za pitanja ili probleme u vezi s vašim proizvodom kontaktirajte svog savjetnika za opremu Tobii Dynavox ili ovlaštenog distributera koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati s vašim osobnim postavkama i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi s proizvodom. Za kontakt podatke pogledajte <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

## Sigurnosno kopirajte svog korisnika TD Snap

### Izradite sigurnosnu kopiju na myTobiiDynavox (preporučeno))



1. Odaberite gumb **„Uredi“**.
2. Odaberite karticu **„Korisnik“**.
3. Odaberite strelicu desno od trenutnog korisnika.



4. Odaberite gumb **„Napravi sigurnosnu kopiju“** koji se nalazi pored imena korisnika čiju biste sigurnosnu kopiju željeli napraviti.
5. Odaberite **„Napravi sigurnosnu kopiju na myTobiiDynavox“**.  
Ako trenutno niste prijavljeni na svoj myTobiiDynavox račun, od vas će se zatražiti da to odmah učinite.
6. Unesite naziv datoteke za sigurnosnu kopiju, a zatim odaberite **„Dalje“**.  
Može biti korisno dodati datum kreiranja sigurnosne kopije nazivu datoteke.
7. Odaberite **„Gotovo“**.

### Napravi sigurnosnu kopiju u lokalnu datoteku




1. Odaberite gumb **„Uredi“**.
2. Odaberite karticu **„Korisnik“**.
3. Odaberite strelicu desno od trenutnog korisnika.







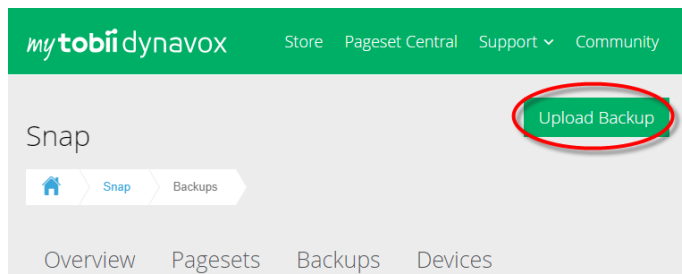

4. Odaberite gumb **„Napravi sigurnosnu kopiju“** koji se nalazi pored imena korisnika čiju biste sigurnosnu kopiju željeli napraviti.
5. Odaberite **„Napravi sigurnosnu kopiju u lokalnu datoteku“**.
6. Unesite naziv za datoteku sigurnosne kopije.
7. Odaberite **„Napravi sigurnosnu kopiju“**.
8. Pomaknite ili kopirajte datoteku sigurnosne kopije iz *Datoteke > Na mom iPadu > TD Snap > UserBackups* u pohranu u oblaku ili na drugi uređaj.



Lokalne sigurnosne kopije datoteka korisnika također mogu biti ručno premještene u myTobiiDynavox. Pomoću svog web preglednika otidite na myTobiiDynavox.com i prijavite se, a zatim idite na *Snap > Sigurnosne kopije* i odaberite **„Prenesi sigurnosnu kopiju“**.



## Sigurnosno kopirajte svoj TD Talk korisnički račun

1. Pokreni TD Talk ()
2. Odaberite jedan od sljedećih načina za pristup nadzornoj ploči.
  - Fiksirajte pogled ispod zaslona, u sredini značajke za praćenje oka ili u njezinu području.
  - Povucite prema gore s razmaknice.
- Gumb  (Nadzorna ploča) postat će vidljiv u donjem središnjem dijelu zaslona.
3. Odaberite gumb  (Dashboard) da biste otvorili nadzorni zaslon.
4. Odaberite radnju  (Postavke) za otvaranje postavki TD Talk.
5. Potražite ikonu  (Prijava) u gornjem lijevom kutu zaslona.
6. Koristite tipkovnicu za upisivanje korisničkog imena u polje **Korisničko ime**.
7. Koristite tipkovnicu za unos lozinke u polje **Lozinka**.
8. Odaberite gumb **Prijava**.
9. Odaberite gumb **Sigurnosna kopija**.  
Datum izrade sigurnosne kopije i uređaj s kojeg je napravljena prikazat će se lijevo od gumba za sigurnosnu kopiju kada je sigurnosna kopija dovršena.
10. Odaberite gumb  (Zatvori) za izlazak.

## Izbriši podatke o kreditnoj kartici



Informacije mogu prikazivati grafike iz sustava iOS, ali upute su iste i za iPadOS.

Da biste uklonili način plaćanja iz svog Apple računa, slijedite ove upute:

Jezik	Veza
English	<a href="https://support.apple.com/en-us/118291">https://support.apple.com/en-us/118291</a>
German	<a href="https://support.apple.com/de-de/118291">https://support.apple.com/de-de/118291</a>
French	<a href="https://support.apple.com/fr-fr/118291">https://support.apple.com/fr-fr/118291</a>
Spanish	<a href="https://support.apple.com/es-mx/118291">https://support.apple.com/es-mx/118291</a>
Dutch	<a href="https://support.apple.com/nl-nl/118291">https://support.apple.com/nl-nl/118291</a>
Swedish	<a href="https://support.apple.com/sv-se/118291">https://support.apple.com/sv-se/118291</a>
Norwegian	<a href="https://support.apple.com/no-no/118291">https://support.apple.com/no-no/118291</a>
Danish	<a href="https://support.apple.com/da-dk/118291">https://support.apple.com/da-dk/118291</a>
Pojednostavljeni kineski	<a href="https://support.apple.com/zh-cn/118291">https://support.apple.com/zh-cn/118291</a>
Japanese	<a href="https://support.apple.com/ja-jp/118291">https://support.apple.com/ja-jp/118291</a>
Italian	<a href="https://support.apple.com/it-it/118291">https://support.apple.com/it-it/118291</a>

### Podrška za uređaj Tobii Dynavox

#### Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu za podršku za svoj uređaj Tobii Dynavox. Ona sadrži ažurne informacije o rješavanju problema, kao i praktične savjete i upute u vezi s proizvodom. Potražite internetske stranice naše korisničke podrške: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Obratite se svom savjetniku za opremu ili distributeru

Za pitanja ili probleme u vezi s vašim proizvodom kontaktirajte svog savjetnika za opremu Tobii Dynavox ili ovlaštenog distributera koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati s vašim osobnim postavkama i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi s proizvodom. Za kontakt podatke pogledajte <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Finnish	<a href="https://support.apple.com/fi-fi/118291">https://support.apple.com/fi-fi/118291</a>
Arabic	<a href="https://support.apple.com/ar-sa/118291">https://support.apple.com/ar-sa/118291</a>
Bugarski	<a href="https://support.apple.com/bg-bg/118291">https://support.apple.com/bg-bg/118291</a>
Poljski	<a href="https://support.apple.com/pl-pl/118291">https://support.apple.com/pl-pl/118291</a>
Slovenski	<a href="https://support.apple.com/sl-si/118291">https://support.apple.com/sl-si/118291</a>
Estonski	<a href="https://support.apple.com/et-ee/118291">https://support.apple.com/et-ee/118291</a>
Portugalski	<a href="https://support.apple.com/pt-pt/118291">https://support.apple.com/pt-pt/118291</a>
Croatian	<a href="https://support.apple.com/hr-hr/118291">https://support.apple.com/hr-hr/118291</a>
Icelandic	<a href="https://support.apple.com/is-is/118291">https://support.apple.com/is-is/118291</a>
Hebrew	<a href="https://support.apple.com/he-il/118291">https://support.apple.com/he-il/118291</a>

## Dodatno: Ispišite stranice TD Snap za komunikaciju

Dok se vaš uređaj popravlja, korisno je imati pri ruci otisnute komunikacijske ploče. Preporučene stranice za ispis: tipkovnice, Core Words, Quickfires i stranice s temama koje najčešće koristite.

Ako nemate pisač priključen na svoj uređaj, slijedite korake za spremanje PDF datoteka u iCloud, pošaljite ih e-poštom ili Airdropom sebi kako biste ih ispisali s drugog uređaja.

Unaprijed izrađene komunikacijske ploče za ispis također su dostupne za preuzimanje u odjeljku *Resursi, stranica 9*



1. Odaberite gumb „**Uredi**“ .
2. Odaberite karticu „**Stranica**“ .



3. Na alatnoj traci za uređivanje s desne strane zaslona odaberite **Ispis**. Otvorit će se dijaloški okvir za odabir stranica.  
Ispis možete pokrenuti i iz dijela **Ispis stranica** na kartici stranica.
4. Prema zadanim postavkama, trenutna stranica se automatski dodaje u red za ispis. Ako želite dodati još stranica u red za ispis, odaberite ih s popisa.
  - Pišite u polje za pretraživanje da biste pretraživali po nazivu stranice.
  - Da biste u red za ispis dodali sve stranice u trenutnim rezultatima pretraživanja, označite **Odaberi sve**.
  - Označite li i odmah nakon toga uklonite oznaku za Odaberi sve, vaš red za ispis bit će ponovno postavljen.
  - Želite li neku stranicu ukloniti iz reda za ispis, odaberite znak **X** pokraj naziva stranice.
5. Nakon što se u red za ispis dodali stranice koje ste željeli, odaberite **Dalje**.



6. Odaberite mogućnosti ispisa po želji. Pregled stranice ažurirat će se kako bi prikazao ishod vaših postavki.

### Podrška za uređaj Tobii Dynavox

#### Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu za podršku za svoj uređaj Tobii Dynavox. Ona sadrži ažurne informacije o rješavanju problema, kao i praktične savjete i upute u vezi s proizvodom. Potražite internetske stranice naše korisničke podrške: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>


#### Obratite se svom savjetniku za opremu ili distributeru

Za pitanja ili probleme u vezi s vašim proizvodom kontaktirajte svog savjetnika za opremu Tobii Dynavox ili ovlaštenog distributera koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati s vašim osobnim postavkama i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi s proizvodom. Za kontakt podatke pogledajte <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.



- Traka za poruke Onemogućite ovu postavku kako biste sakrili traku poruka na isprintanoj stranici.
  - Alatna traka Onemogućite ovu postavku kako biste sakrili alatnu traku na ispisanoj stranici.
  - Vizualizacija veze Onemogućite ovu postavku kako biste sakrili ikone pokazatelja poveznica na gumbima za poveznice na ispisanoj stranici.
  - **Broj upotreba gumba:** Omogućite ovu postavku kako biste na isprintanoj stranici(ama) prikazali trenutni broj upotreba gumba. Napomena: Da biste mogli vidjeti brojčane rezultate uporabe gumba, praćenje podataka mora biti omogućeno.
7. Nakon što ste podesili sve mogućnosti u skladu sa svojim željama, odaberite **Ispis**.
  8. Ispiši ili spremi kao PDF.
    - Pošalji na svoj pisač: Odaberite svoj pisač i konfigurirajte željene postavke, zatim odaberite **Isprintaj**.



- Sačuvaj kao PDF: Odaberite  Dijeli, zatim izaberite opciju za slanje PDF-a sebi putem AirDrop-a, Poruka ili Pošte ili odaberite Spremi u datoteke kako biste ga spremili na svoj iCloud pogon. Pristupite svom PDF-u s drugog uređaja koji ima mogućnost ispisa i ispišite ga.


## Dodatno: Ispišite stranice za komunikaciju na TD Talku

Morate osigurati da su vaš AirPrint-om omogućen pisač i vaš TD Navio povezani na istu Wi-Fi mrežu.


Da biste ispisali iz TD Talk, slijedite ove korake.

1. Idite na stranicu za ispis u TD Talku.
2. Istovremeno pritisnite tipku **za uključivanje** i tipke **za pojačavanje ili smanjivanje zvuka**.
3. Odaberite novi mali prozor koji sadrži snimku zaslona u donjem lijevom kutu zaslona.



4. Odaberite gumb  (Podijeli).




5. Odaberite gumb  (Ispis).

6. Ispiši ili spremi kao PDF.

- **Pošalji na svoj pisač:** Odaberite pisač i konfigurirajte željene postavke, zatim odaberite  (Ispis).




- **Sačuvaj kao PDF:** Odaberite  (Podijeli), zatim odaberite opciju za slanje PDF-a sebi putem AirDrop-a, Poruka ili Pošte ili odaberite Spremi u datoteke kako biste ga spremili na svoj iCloud pogon. Pristupite svom PDF-u s drugog uređaja koji ima mogućnost ispisa i ispišite ga.

## Dodatno: Preuzmite aplikacije na privremeni uređaj

Ako imate na raspolaganju drugi kompatibilni uređaj, poput iPada, možete preuzeti svoje aplikacije za komunikaciju i vratiti sigurnosne kopije svojih korisničkih podataka kako biste mogli nastaviti komunicirati dok se vaš TD Navio popravlja.


## Preuzmite TD Snap

1. S početnog zaslona otvorite AppStore ()
2. Odaberite karticu Pretraživanje.

Pretraži **TD Snap** ()

3. Odaberite gumb **Pribavi** pored aplikacije TD Snap.
4. Odaberite gumb **Instaliraj**.
5. Unesite lozinku Apple ID-a.
6. Odaberite gumb **Potvrdi**.
7. Odaberite gumb **Otvori** kada se preuzimanje završi.

## Preuzmi TD Talk

1. S početnog zaslona otvorite AppStore ()
2. Odaberite karticu Pretraživanje.

Pretraži **TD Talk** ()

3. Odaberite gumb **Get** pored aplikacije TD Talk.
4. Odaberite gumb **Instaliraj**.
5. Unesite lozinku Apple ID-a.
6. Odaberite gumb **Potvrdi**.
7. Odaberite gumb **Otvori** kada se preuzimanje završi.

## Obnovite svoj TD Snap korisnički račun

Prije dovršetka sljedećih koraka u aplikaciji TD Snap idite na *Uređivanje > Korisnik > myTobiiDynavox račun* i prijavite se koristeći svoje podatke za myTobiiDynavox. Ovo će omogućiti govor na ovom uređaju koristeći jednu od pratećih licenci koje su uključene uz vaš TD Navio.

Za upravljanje svojim partnerskim licencama posjetite myTobiiDynavox.com, prijavite se i odaberite *Moj račun > Licence*.

### Vrati korisnika iz myTobiiDynavoxa



1. Odaberite gumb **„Uredi“**.
2. Odaberite karticu **„Korisnik“**.
3. Odaberite strelicu desno od trenutnog korisnika.
4. Odaberite **„Novi korisnik“**.
5. Odaberite **„Vrati postojećeg korisnika“**.
6. Ako trenutno niste prijavljeni u myTobiiDynavox, unesite adresu svoje e-pošte i lozinku, a zatim odaberite **Next**.
7. Sa popisa odaberite sigurnosnu datoteku korisnika, a zatim odaberite **„Dalje“**.

### Vrati korisnika iz lokalne datoteke

Napomena: Prije dovršetka sljedećih koraka morate kopirati svoju .sub sigurnosnu kopiju u *Datoteke > Na mom iPadu > TD Snap > UserBackups*



1. Odaberite gumb **„Uredi“**.
2. Odaberite karticu **„Korisnik“**.

## Podrška za uređaj Tobii Dynavox

### Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu za podršku za svoj uređaj Tobii Dynavox. Ona sadrži ažurne informacije o rješavanju problema, kao i praktične savjete i upute u vezi s proizvodom. Potražite internetske stranice naše korisničke podrške: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

### Obratite se svom savjetniku za opremu ili distributeru

Za pitanja ili probleme u vezi s vašim proizvodom kontaktirajte svog savjetnika za opremu Tobii Dynavox ili ovlaštenog distributera koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati s vašim osobnim postavkama i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi s proizvodom. Za kontakt podatke pogledajte <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

3. Odaberite strelicu desno od trenutnog korisnika.
4. Odaberite „**Novi korisnik**“.
5. Odaberite „**Vrati postojećeg korisnika**“.
6. Odaberite **Vrati iz lokalne datoteke**.
7. Odaberite datoteku sigurnosne kopije korisnika s popisa, zatim odaberite **Obnovi korisnika**.


## Obnovite svoj TD Talk korisnički račun


1. Fiksirajte pogled ispod zaslona, u sredini značajke za praćenje oka ili u njezinu području.



Gumb (Nadzorna ploča) postat će vidljiv u donjem središnjem dijelu zaslona.

2. Odaberite gumb  (Dashboard) da biste otvorili nadzorni zaslon.

3. Odaberite radnju  (Postavke) za otvaranje postavki TD Talk.

4. Potražite ikonu  (Prijava) u gornjem lijevom kutu zaslona.
5. Koristite tipkovnicu za upisivanje korisničkog imena u polje **Korisničko ime**.
6. Koristite tipkovnicu za unos lozinke u polje **Lozinka**.
7. Odaberite gumb **Prijava**.
8. Odaberite gumb **Vrati**.  
Datum obnove prikazat će se lijevo od gumba **Obnovi** kada se obnova izvrši.

9. Odaberite gumb  (Zatvori) za izlazak.

## Pokrenite postupak popravka

Naš tim će vas voditi kroz sljedeće korake, uključujući pakiranje vašeg uređaja i organizaciju besplatne dostave, te pružiti podršku tijekom cijelog procesa popravka.

Za početak postupka, molimo ispunite online obrazac za opoziv:

- **Globalno:** <https://www.tobiidynavox.com/pages/td-navio-recall>
- **US:** <https://us.tobiidynavox.com/pages/td-navio-recall>
- **SE:** <https://se.tobiidynavox.com/pages/td-navio-recall>

Alternativno, možete kontaktirati podršku telefonom ili e-poštom. Molimo imajte pri ruci serijski broj vašeg TD Navio. Serijski broj se nalazi ispod i desno od izvlačne nožice na donjoj strani uređaja.

### Globalni ured

Telefon: +46 (0)8 522 950 20

Radno vrijeme: Ponedjeljak–petak, 9:00–17:00 (CET)

E-pošta: support.eu@tobiidynavox.com

### Ured za Sjevernu Ameriku

Telefon: +1-800-344-1778, opcija 1

Radno vrijeme: Pon.–Pet., 9:00–21:00 (ET)

E-pošta: support.na@tobiidynavox.com

## Što trebam poslati sa svojim uređajem?

Molimo pošaljite samo sam uređaj TD Navio.

- Nemojte uključivati punjače, kabele, dodatke ili drugu opremu.
- Ostavite zaštitnu futrolu na uređaju.

#### Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu za podršku za svoj uređaj Tobii Dynavox. Ona sadrži ažurne informacije o rješavanju problema, kao i praktične savjete i upute u vezi s proizvodom.

Potražite internetske stranice naše korisničke podrške: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Obratite se svom savjetniku za opremu ili distributeru

Za pitanja ili probleme u vezi s vašim proizvodom kontaktirajte svog savjetnika za opremu Tobii Dynavox ili ovlaštenog distributera koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati s vašim osobnim postavkama i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi s proizvodom. Za kontakt podatke pogledajte <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Primit ćete jasne upute za otpremu, uključujući smjernice za pakiranje, kada vam bude izdana autorizacija za popravak (unutar Sjedinjenih Američkih Država) ili autorizacija za otpremu robe na popravak (izvan Sjedinjenih Američkih Država).

## Obnova nakon popravka

Ako je vaš uređaj resetiran tijekom postupka popravka, slijedite korake u nastavku kako biste obnovili uređaj iz sigurnosnih kopija. Većina uređaja se tijekom popravka ne resetira, stoga ove korake izvedite samo ako je potrebno.

## Obnovite uređaj iz sigurnosne kopije



Informacije mogu prikazivati grafike iz sustava iOS, ali upute su iste i za iPadOS.

Da biste vratili uređaj iz sigurnosne kopije, slijedite ove upute:

Jezik	Veza
English	<a href="https://support.apple.com/en-us/118105">https://support.apple.com/en-us/118105</a>
German	<a href="https://support.apple.com/de-de/118105">https://support.apple.com/de-de/118105</a>
French	<a href="https://support.apple.com/fr-fr/118105">https://support.apple.com/fr-fr/118105</a>
Spanish	<a href="https://support.apple.com/es-mx/118105">https://support.apple.com/es-mx/118105</a>
Dutch	<a href="https://support.apple.com/nl-nl/118105">https://support.apple.com/nl-nl/118105</a>
Swedish	<a href="https://support.apple.com/sv-se/118105">https://support.apple.com/sv-se/118105</a>
Norwegian	<a href="https://support.apple.com/no-no/118105">https://support.apple.com/no-no/118105</a>
Danish	<a href="https://support.apple.com/da-dk/118105">https://support.apple.com/da-dk/118105</a>
Pojednostavljeni kineski	<a href="https://support.apple.com/zh-cn/118105">https://support.apple.com/zh-cn/118105</a>
Japanese	<a href="https://support.apple.com/ja-jp/118105">https://support.apple.com/ja-jp/118105</a>
Italian	<a href="https://support.apple.com/it-it/118105">https://support.apple.com/it-it/118105</a>
Finnish	<a href="https://support.apple.com/fi-fi/118105">https://support.apple.com/fi-fi/118105</a>
Arabic	<a href="https://support.apple.com/ar-sa/118105">https://support.apple.com/ar-sa/118105</a>
Bugarski	<a href="https://support.apple.com/bg-bg/118105">https://support.apple.com/bg-bg/118105</a>
Poljski	<a href="https://support.apple.com/pl-pl/118105">https://support.apple.com/pl-pl/118105</a>
Slovenski	<a href="https://support.apple.com/sl-si/118105">https://support.apple.com/sl-si/118105</a>
Estonski	<a href="https://support.apple.com/et-ee/118105">https://support.apple.com/et-ee/118105</a>
Portugalski	<a href="https://support.apple.com/pt-pt/118105">https://support.apple.com/pt-pt/118105</a>
Croatian	<a href="https://support.apple.com/hr-hr/118105">https://support.apple.com/hr-hr/118105</a>
Icelandic	<a href="https://support.apple.com/is-is/118105">https://support.apple.com/is-is/118105</a>
Hebrew	<a href="https://support.apple.com/he-il/118105">https://support.apple.com/he-il/118105</a>

## Resursi

### Isprintaj upute za komunikacijsku ploču

Korisnik AAC-a može dodirnuti stavke na komunikacijskoj ploči. Koristite slova na komunikacijskoj ploči da biste ispisali riječi.

Ako je dodirivanje predmeta izazovno, ploču je moguće koristiti s partnerom na sljedeći način.

1. Potvrdite kako korisnik AAC-a označava "da". To bi moglo biti reći da, kimnuti glavom, pogledati gore itd. Također pitajte želi li korisnik AAC-a da partner u komunikaciji pogodi što ispisuje ili ne.
2. Partner pokazuje na svaki redak po redu i pita "Je li ovo ovaj redak?" ili naziva redak brojem ili slovom ("Je li to redak 1?", "Je li to redak A?"). Pauzirajte između redaka kako biste korisniku AAC-a dali vremena za odgovor.
3. Korisnik AAC-a označi "da" kada je njihov partner stigao do retka koji želi. Ako korisnik AAC-a ne označi "da", ponovno prođite kroz retke.
4. Partner pokazuje na stavke u naznačenom redu i imenuje ih ("Je li to A?", "Je li to B?", "Je li to pogreška?" itd.)
5. Korisnik AAC-a označi "da" kada je njihov partner došao do stavke koju želi. Ako korisnik AAC-a ne označi "da", ponovno prođite kroz stavke u tom redu.
6. Ponavljajte korake 2–5 dok korisnik AAC-a ne dovrši svoju poruku.

## Afrikans

Set stranica	URL
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_af_ZA.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_af_ZA.pdf</a>

## Arabic

Set stranica	URL
Skeniranje uz pomoć partnera	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_ar.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_ar.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_ar.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_ar.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_ar.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_ar.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_ar.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_ar.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_ar.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_ar.pdf</a>

## Bugarski

Set stranica	URL
Skeniranje uz pomoć partnera	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_bg-BG.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_bg-BG.pdf</a>

## Danish

Set stranica	URL
Skeniranje uz pomoć partnera	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_da.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_da.pdf</a>

### Podrška za uređaj Tobii Dynavox

#### Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu za podršku za svoj uređaj Tobii Dynavox. Ona sadrži ažurne informacije o rješavanju problema, kao i praktične savjete i upute u vezi s proizvodom. Potražite internetske stranice naše korisničke podrške: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Obratite se svom savjetniku za opremu ili distributeru

Za pitanja ili probleme u vezi s vašim proizvodom kontaktirajte svog savjetnika za opremu Tobii Dynavox ili ovlaštenog distributera koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati s vašim osobnim postavkama i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi s proizvodom. Za kontakt podatke pogledajte <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Set stranica	URL
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_da.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_da.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_da.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_da.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_da.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_da.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_da_DK.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_da_DK.pdf</a>
Tekst	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_da.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_da.pdf</a>

## Dutch

Set stranica	URL
Skeniranje uz pomoć partnera	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_nl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_nl.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_nl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_nl.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_nl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_nl.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_nl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_nl.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_nl_NL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_nl_NL.pdf</a>
Tekst	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_nl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_nl.pdf</a>

## Engleski - Australija

Set stranica	URL
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en_AU.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en_AU.pdf</a>
Motor Plan	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en_AU.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en_AU.pdf</a>
Motor Plan	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en_AU.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en_AU.pdf</a>
Motor Plan	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en_AU.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en_AU.pdf</a>

### Podrška za uređaj Tobii Dynavox

#### Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu za podršku za svoj uređaj Tobii Dynavox. Ona sadrži ažurne informacije o rješavanju problema, kao i praktične savjete i upute u vezi s proizvodom. Potražite internetske stranice naše korisničke podrške: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Obratite se svom savjetniku za opremu ili distributeru

Za pitanja ili probleme u vezi s vašim proizvodom kontaktirajte svog savjetnika za opremu Tobii Dynavox ili ovlaštenog distributera koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati s vašim osobnim postavkama i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi s proizvodom. Za kontakt podatke pogledajte <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Set stranica	URL
Afazija	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_en-UK.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_en-UK.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_en-UK.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_en-UK.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_en-UK.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_en-UK.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_en-UK.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_en-UK.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en_UK.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en_UK.pdf</a>
Motor Plan	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en_UK.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en_UK.pdf</a>
Motor Plan	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en_GB.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en_GB.pdf</a>
Motor Plan	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en_GB.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en_GB.pdf</a>

## Engleski (SAD)

Set stranica	URL
Skeniranje uz pomoć partnera	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_en.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_en.pdf</a>
Afazija	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_en-US.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_en-US.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_en-US.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_en-US.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_en-US.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_en-US.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_en-US.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_en-US.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en-US.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en-US.pdf</a>
Motor Plan	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en-US.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en-US.pdf</a>

### Podrška za uređaj Tobii Dynavox

#### Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu za podršku za svoj uređaj Tobii Dynavox. Ona sadrži ažurne informacije o rješavanju problema, kao i praktične savjete i upute u vezi s proizvodom. Potražite internetske stranice naše korisničke podrške: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Obratite se svom savjetniku za opremu ili distributeru

Za pitanja ili probleme u vezi s vašim proizvodom kontaktirajte svog savjetnika za opremu Tobii Dynavox ili ovlaštenog distributera koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati s vašim osobnim postavkama i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi s proizvodom. Za kontakt podatke pogledajte <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Set stranica	URL
Motor Plan	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en-US.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en-US.pdf</a>
Motor Plan	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en-US.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en-US.pdf</a>
Tekst	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_en.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_en.pdf</a>

## Estonski

Set stranica	URL
Skeniranje uz pomoć partnera	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_et-EE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_et-EE.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_et_EE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_et_EE.pdf</a>

## Finnish

Set stranica	URL
Skeniranje uz pomoć partnera	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_fi.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_fi.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fi.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fi.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fi.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fi.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fi.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fi.pdf</a>

## Francuski (Francuska)

Set stranica	URL
Skeniranje uz pomoć partnera	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_fr.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_fr.pdf</a>
Afazija	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_fr_FR.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_fr_FR.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fr-FR.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fr-FR.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fr-FR.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fr-FR.pdf</a>

### Podrška za uređaj Tobii Dynavox

#### Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu za podršku za svoj uređaj Tobii Dynavox. Ona sadrži ažurne informacije o rješavanju problema, kao i praktične savjete i upute u vezi s proizvodom. Potražite internetske stranice naše korisničke podrške: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Obratite se svom savjetniku za opremu ili distributeru

Za pitanja ili probleme u vezi s vašim proizvodom kontaktirajte svog savjetnika za opremu Tobii Dynavox ili ovlaštenog distributera koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati s vašim osobnim postavkama i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi s proizvodom. Za kontakt podatke pogledajte <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Set stranica	URL
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fr-FR.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fr-FR.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_fr_FR.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_fr_FR.pdf</a>
Tekst	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_fr.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_fr.pdf</a>

## Francuski - Kanada

Set stranica	URL
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fr-CA.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fr-CA.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fr-CA.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fr-CA.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fr-CA.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fr-CA.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_fr_CA.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_fr_CA.pdf</a>

## German

Set stranica	URL
Skeniranje uz pomoć partnera	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_de.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_de.pdf</a>
Afazija	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_de_DE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_de_DE.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_de-DE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_de-DE.pdf</a>
Core First 5x5 (PCS)	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_PCS_de.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_PCS_de.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_de-DE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_de-DE.pdf</a>
Core First 6x6 (PCS)	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_de_PCS.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_de_PCS.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_de-DE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_de-DE.pdf</a>
Core First 7x7 (PCS)	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_PCS_de.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_PCS_de.pdf</a>

### Podrška za uređaj Tobii Dynavox

#### Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu za podršku za svoj uređaj Tobii Dynavox. Ona sadrži ažurne informacije o rješavanju problema, kao i praktične savjete i upute u vezi s proizvodom. Potražite internetske stranice naše korisničke podrške: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Obratite se svom savjetniku za opremu ili distributeru

Za pitanja ili probleme u vezi s vašim proizvodom kontaktirajte svog savjetnika za opremu Tobii Dynavox ili ovlaštenog distributera koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati s vašim osobnim postavkama i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi s proizvodom. Za kontakt podatke pogledajte <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Set stranica	URL
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_de_DE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_de_DE.pdf</a>
Express METACOM	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_de-DE-Metacom.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_de-DE-Metacom.pdf</a>
Motor Plan 30 METACOM	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_METACOM_de-DE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_METACOM_de-DE.pdf</a>
Motor Plan 30 PCS	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30-PCS_all_de_DE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30-PCS_all_de_DE.pdf</a>
Motor Plan 40 METACOM	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_de-DE-Metacom.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_de-DE-Metacom.pdf</a>
Motor Plan 40 PCS	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40-PCS_all_de_DE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40-PCS_all_de_DE.pdf</a>
Motor Plan 66 METACOM	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_de-DE-Metacom.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_de-DE-Metacom.pdf</a>
Motorni plan 66 PCS	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66-PCS_all_de_DE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66-PCS_all_de_DE.pdf</a>
Tekst	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_de.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_de.pdf</a>

## Hebrew

Set stranica	URL
Skeniranje uz pomoć partnera	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner assisted scanning he-IL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner assisted scanning he-IL.pdf</a>
Core First 5x5 za žene	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_female_he-IL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_female_he-IL.pdf</a>
Core First 5x5 za muškarce	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_male_he-IL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_male_he-IL.pdf</a>
Core First 6x6 ženski	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_female_he-IL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_female_he-IL.pdf</a>

### Podrška za uređaj Tobii Dynavox

#### Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu za podršku za svoj uređaj Tobii Dynavox. Ona sadrži ažurne informacije o rješavanju problema, kao i praktične savjete i upute u vezi s proizvodom. Potražite internetske stranice naše korisničke podrške: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Obratite se svom savjetniku za opremu ili distributeru

Za pitanja ili probleme u vezi s vašim proizvodom kontaktirajte svog savjetnika za opremu Tobii Dynavox ili ovlaštenog distributera koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati s vašim osobnim postavkama i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi s proizvodom. Za kontakt podatke pogledajte <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Set stranica	URL
Core First 6x6 muški	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_male_he-IL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_male_he-IL.pdf</a>
Core First 7x7 ženski	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_female_he-IL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_female_he-IL.pdf</a>
Core First 7x7 muški	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_male_he-IL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_male_he-IL.pdf</a>

## Icelandic

Set stranica	URL
Skeniranje uz pomoć partnera	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_is-IS.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_is-IS.pdf</a>
Core First 5x5 za žene	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_female_is-IS.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_female_is-IS.pdf</a>
Core First 5x5 za muškarce	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_male_is-IS.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_male_is-IS.pdf</a>
Core First 6x6 ženski	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_female_is-IS.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_female_is-IS.pdf</a>
Core First 6x6 muški	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_male_is-IS.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_male_is-IS.pdf</a>
Core First 7x7 ženski	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_female_is-IS.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_female_is-IS.pdf</a>
Core First 7x7 muški	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_male_is-IS.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_male_is-IS.pdf</a>
Express ženski	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_is-IS-female.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_is-IS-female.pdf</a>
Express muški	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_is-IS-male.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_is-IS-male.pdf</a>
Tekst	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_is-IS.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_is-IS.pdf</a>

## Podrška za uređaj Tobii Dynavox

### Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu za podršku za svoj uređaj Tobii Dynavox. Ona sadrži ažurne informacije o rješavanju problema, kao i praktične savjete i upute u vezi s proizvodom. Potražite internetske stranice naše korisničke podrške: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

### Obratite se svom savjetniku za opremu ili distributeru

Za pitanja ili probleme u vezi s vašim proizvodom kontaktirajte svog savjetnika za opremu Tobii Dynavox ili ovlaštenog distributera koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati s vašim osobnim postavkama i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi s proizvodom. Za kontakt podatke pogledajte <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

## Irski

Set stranica	URL
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_ga_IE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_ga_IE.pdf</a>

## Italian

Set stranica	URL
Skeniranje uz pomoć partnera	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_it.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_it.pdf</a>
Afazija	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_it_IT.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_it_IT.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_it-IT.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_it-IT.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_it-IT.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_it-IT.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_it-IT.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_it-IT.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_it_IT.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_it_IT.pdf</a>
Tekst	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_it.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_it.pdf</a>

## Japanese

Set stranica	URL
Core First 5x5 Hiragana	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_Hiragana_ja.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_Hiragana_ja.pdf</a>
Core First 5x5 Kanji	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_Kanji_ja.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_Kanji_ja.pdf</a>
Core First 6x6 Hiragana	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_Hiragana_ja.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_Hiragana_ja.pdf</a>
Core First 6x6 Kanji	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_Kanji_ja.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_Kanji_ja.pdf</a>
Core First 7x7 Hiragana	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_Hiragana_ja.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_Hiragana_ja.pdf</a>

### Podrška za uređaj Tobii Dynavox

#### Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu za podršku za svoj uređaj Tobii Dynavox. Ona sadrži ažurne informacije o rješavanju problema, kao i praktične savjete i upute u vezi s proizvodom. Potražite internetske stranice naše korisničke podrške: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Obratite se svom savjetniku za opremu ili distributeru

Za pitanja ili probleme u vezi s vašim proizvodom kontaktirajte svog savjetnika za opremu Tobii Dynavox ili ovlaštenog distributera koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati s vašim osobnim postavkama i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi s proizvodom. Za kontakt podatke pogledajte <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Set stranica	URL
Core First 7x7 Kanji	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_Kanji_ja.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_Kanji_ja.pdf</a>
Express Hiragana	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_Hiragana_ja.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_Hiragana_ja.pdf</a>
Express Kanji	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_Kanji_ja.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_Kanji_ja.pdf</a>

## Norwegian

Set stranica	URL
Skeniranje uz pomoć partnera	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_no.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_no.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_no.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_no.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_no.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_no.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_no.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_no.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_nb_NO.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_nb_NO.pdf</a>
Tekst	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_no.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_no.pdf</a>

## Poljski

Set stranica	URL
Skeniranje uz pomoć partnera	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_pl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_pl.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_pl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_pl.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_pl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_pl.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_pl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_pl.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_pl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_pl.pdf</a>

### Podrška za uređaj Tobii Dynavox

#### Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu za podršku za svoj uređaj Tobii Dynavox. Ona sadrži ažurne informacije o rješavanju problema, kao i praktične savjete i upute u vezi s proizvodom. Potražite internetske stranice naše korisničke podrške: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Obratite se svom savjetniku za opremu ili distributeru

Za pitanja ili probleme u vezi s vašim proizvodom kontaktirajte svog savjetnika za opremu Tobii Dynavox ili ovlaštenog distributera koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati s vašim osobnim postavkama i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi s proizvodom. Za kontakt podatke pogledajte <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

## Portugalski - Portugal

Set stranica	URL
Skeniranje uz pomoć partnera	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_pt.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_pt.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_pt.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_pt.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_pt.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_pt.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_pt.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_pt.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_pt_PT.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_pt_PT.pdf</a>
Tekst	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_pt.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_pt.pdf</a>

## Slovenski

Set stranica	URL
Skeniranje uz pomoć partnera	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_sl-SL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_sl-SL.pdf</a>
Express ženski	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_female_sl-SL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_female_sl-SL.pdf</a>
Express muški	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_male_sl-SL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_male_sl-SL.pdf</a>

## Španjolski - Meksiko

Set stranica	URL
Afazija	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_es_MX.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_es_MX.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_es_MX.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_es_MX.pdf</a>
Motor Plan	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_es_MX.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_es_MX.pdf</a>
Motor Plan	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_es_MX.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_es_MX.pdf</a>

### Podrška za uređaj Tobii Dynavox

#### Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu za podršku za svoj uređaj Tobii Dynavox. Ona sadrži ažurne informacije o rješavanju problema, kao i praktične savjete i upute u vezi s proizvodom. Potražite internetske stranice naše korisničke podrške: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Obratite se svom savjetniku za opremu ili distributeru

Za pitanja ili probleme u vezi s vašim proizvodom kontaktirajte svog savjetnika za opremu Tobii Dynavox ili ovlaštenog distributera koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati s vašim osobnim postavkama i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi s proizvodom. Za kontakt podatke pogledajte <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Set stranica	URL
Motor Plan	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_es_MX.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_es_MX.pdf</a>
Tekst	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_es-MX.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_es-MX.pdf</a>

## Španjolski (Španjolska)

Set stranica	URL
Skeniranje uz pomoć partnera	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_es.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_es.pdf</a>
Afazija	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_es-ES.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_es-ES.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_es.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_es.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_es.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_es.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_es.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_es.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_es_ES.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_es_ES.pdf</a>
Motor Plan	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_es_ES.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_es_ES.pdf</a>
Motor Plan	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_es_ES.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_es_ES.pdf</a>
Motor Plan	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_es_ES.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_es_ES.pdf</a>
Tekst	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_es.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_es.pdf</a>

## Swedish

Set stranica	URL
Skeniranje uz pomoć partnera	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_sv.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_sv.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_sv.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_sv.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_sv.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_sv.pdf</a>

### Podrška za uređaj Tobii Dynavox

#### Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu za podršku za svoj uređaj Tobii Dynavox. Ona sadrži ažurne informacije o rješavanju problema, kao i praktične savjete i upute u vezi s proizvodom. Potražite internetske stranice naše korisničke podrške: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Obratite se svom savjetniku za opremu ili distributeru

Za pitanja ili probleme u vezi s vašim proizvodom kontaktirajte svog savjetnika za opremu Tobii Dynavox ili ovlaštenog distributera koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati s vašim osobnim postavkama i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi s proizvodom. Za kontakt podatke pogledajte <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Set stranica	URL
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_sv.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_sv.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_sv_SE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_sv_SE.pdf</a>
Tekst	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_sv.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_sv.pdf</a>

## Podrška za uređaj Tobii Dynavox

### Pronađite pomoć na mreži

Pogledajte stranicu za podršku za svoj uređaj Tobii Dynavox. Ona sadrži ažurne informacije o rješavanju problema, kao i praktične savjete i upute u vezi s proizvodom. Potražite internetske stranice naše korisničke podrške: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

### Obratite se svom savjetniku za opremu ili distributeru

Za pitanja ili probleme u vezi s vašim proizvodom kontaktirajte svog savjetnika za opremu Tobii Dynavox ili ovlaštenog distributera koji će vam pomoći. Oni su najbolje upoznati s vašim osobnim postavkama i mogu vam najbolje pomoći savjetima i obukom u vezi s proizvodom. Za kontakt podatke pogledajte <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.