

Upplýsingar um innköllun TD Navio

Undirbúningur

Þetta skjal lýsir hvernig á að undirbúa sig fyrir viðgerðir á TD Navio Midi eða TD Navio Maxi vegna innköllunar. Fylgdu leiðbeiningunum til að taka afrit af tækinu þínu og gögnum samskiptaherbergisins, tryggja persónuupplýsingar þínar og undirbúa aðrar samskiptaleiðir.

Þegar þú hefur lokið skrefunum í Undirbúningskaflanum, haltu áfram með *Byrjaðu viðgerðarferlið, síða 8*

Ef þú þarft aðstoð, vinsamlegast hafðu samband við þjónustuverið. Við vitum að þetta tekur tíma og fyrirhöfn, og við erum hér til að hjálpa.

TILKYNNING

Forðastu gagnatap

Tækið þitt gæti verið endurstíllt á meðan á viðgerð fer. Ef tækið er endurstíllt verða öll persónuleg gögn og stillingar á tækinu hreinsuð. Það er á ábyrgð notandans að afrita gögn tækisins áður en það er sent til viðgerðar. Ef ekki er staðið við það getur það leitt til varanlegrar taps gagna. Fylgdu skrefunum í þessu skjali vandlega til að taka afrit af tækinu þínu.

Taktu eftir upplýsingum um notendareikninginn

1. Taktu niður Apple ID-ið þitt og lykilorðið þitt.
2. Taktu eftir innskráningarnafni og lykilorði fyrir myTobiiDynavox.

Hvernig stofna ég myTobiiDynavox-reikning?

Farðu á [Búa til myTobiiDynavox-reikning](#) til að búa til myTobiiDynavox-reikning.

Afritaðu TD Navio með iPadOS



Upplýsingarnar kunna að sýna grafík úr iOS, en leiðbeiningin er sú sama fyrir iPadOS.

Afrit af tækinu gerir afrit af upplýsingum tækisins, þar á meðal persónulegum skrá, forritum, ljósmyndum og stillingum. Afritskræfuna er hægt að nota til að endurheimta tækið þitt í það ástand sem það var í eftir endurstillingu. Til að taka varasafn af TD Navio skaltu fylgja þessari leiðbeiningu:

| Tungumál | Tengill |
|---------------------|---|
| Enska | https://support.apple.com/en-us/108366 |
| Þýska | https://support.apple.com/de-de/108366 |
| Franska | https://support.apple.com/fr-fr/108366 |
| Spænska | https://support.apple.com/es-mx/108366 |
| Hollenska | https://support.apple.com/nl-nl/108366 |
| Sænska | https://support.apple.com/sv-se/108366 |
| Norska | https://support.apple.com/no-no/108366 |
| Danska | https://support.apple.com/da-dk/108366 |
| Einfölduð kínverska | https://support.apple.com/zh-cn/108366 |
| Japanska | https://support.apple.com/ja-jp/108366 |

Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækið þitt

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörnunni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluaðila

Sérú með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

| | |
|------------|---|
| Ítalska | https://support.apple.com/it-it/108366 |
| Finnska | https://support.apple.com/fi-fi/108366 |
| Arabíska | https://support.apple.com/ar-sa/108366 |
| Búlgarska | https://support.apple.com/bg-bg/108366 |
| Pólska | https://support.apple.com/pl-pl/108366 |
| Slóvenska | https://support.apple.com/sl-si/108366 |
| Eistneska | https://support.apple.com/et-ee/108366 |
| Portúgölsk | https://support.apple.com/pt-pt/108366 |
| Króatíska | https://support.apple.com/hr-hr/108366 |
| Íslenska | https://support.apple.com/is-is/108366 |
| Hebreska | https://support.apple.com/he-il/108366 |

Tengdu TD Navio-tækið þitt við Wi-Fi.



Upplýsingarnar kunna að sýna grafík úr iOS, en leiðbeiningin er sú sama fyrir iPadOS.

Til að tengja TD Navio þinn við Wi-Fi skaltu fylgja þessum leiðbeiningum:

| Tungumál | Tengill |
|---------------------|---|
| Enska | https://support.apple.com/en-us/111107 |
| Þýska | https://support.apple.com/de-de/111107 |
| Franska | https://support.apple.com/fr-fr/111107 |
| Spænska | https://support.apple.com/es-mx/111107 |
| Hollenska | https://support.apple.com/nl-nl/111107 |
| Sænska | https://support.apple.com/sv-se/111107 |
| Norska | https://support.apple.com/no-no/111107 |
| Danska | https://support.apple.com/da-dk/111107 |
| Einfölduð kínverska | https://support.apple.com/zh-cn/111107 |
| Japanska | https://support.apple.com/ja-jp/111107 |
| Ítalska | https://support.apple.com/it-it/111107 |
| Finnska | https://support.apple.com/fi-fi/111107 |
| Arabíska | https://support.apple.com/ar-sa/111107 |
| Búlgarska | https://support.apple.com/bg-bg/111107 |
| Pólska | https://support.apple.com/pl-pl/111107 |
| Slóvenska | https://support.apple.com/sl-si/111107 |
| Eistneska | https://support.apple.com/et-ee/111107 |
| Portúgölsk | https://support.apple.com/pt-pt/111107 |
| Króatíska | https://support.apple.com/hr-hr/111107 |
| Íslenska | https://support.apple.com/is-is/111107 |
| Hebreska | https://support.apple.com/he-il/111107 |

Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækið þitt

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörnunni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluaðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Afritaðu TD Snap-notandann þinn

Aftur á myTobiiDynavox (mælt með)



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu örina hægra megin við núverandi notanda.



4. Veldu **Öryggisafrita** hnappinn við hliðina á heiti notandans sem þú vilt taka öryggisafrit af.
5. Veldu **Öryggisafrita í myTobiiDynavox**.
Ef þú ert ekki skráð/ur inn á myTobiiDynavox reikninginn þinn verður þú beðin/n um að gera það núna.
6. Settu inn heiti fyrir öryggisafritaskrá af notanda, veldu síðan **Næst**.
Það gæti verið gagnlegt að láta dagsetningu öryggisafritunar vera hluta af skráarheitinu.
7. Veldu **Búið**.

Taka öryggisafrit yfir á staðbundna skrá




1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu örina hægra megin við núverandi notanda.



4. Veldu **Öryggisafrita** hnappinn við hliðina á heiti notandans sem þú vilt taka öryggisafrit af.
5. Veldu **Öryggisafrita í staðbundna skrá**.
6. Sláið inn nafn fyrir afritunarskrána.
7. Veldu **Öryggisafrita**.
8. Færðu eða afritaðu öryggisafritsskrána úr *Skrár > Á iPáðinum mínum > TD Snap > Öryggisafrit notenda* í skýgeymslu eða á annað tæki.



Einnig má færa staðbundna öryggisafritunarskrá handvirkt til myTobiiDynavox. Notaðu vafrann þinn til að fara á myTobiiDynavox.com og skráðu þig inn, farðu síðan á *Snap > afrit* og veldu **Hlaða upp afriti**.

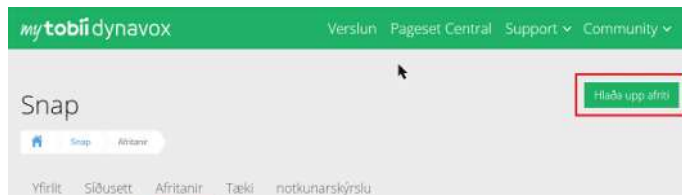





Afritaðu TD Talk-notandann þinn



1. Byrjaðu TD-Talk ().
2. Veldu eina af eftirfarandi leiðum til að nálgast mælaborðið.
 - Festu augnarráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.
 - Sveipaðu upp frá rýmistökknum.



Hnappurinn (Mælaborð) verður sýnilegur í neðri miðhluta skjásins.

3. Veldu hnappinn  (Mælaborð) til að opna mælaborðið.
4. Veldu aðgerðina  (Stillingar) til að opna TD Talk-stillingarnar.
5. Leitaðu að táknum  (Innskrá) í efra vinstra horni skjásins.
6. Notaðu lykilorðið til að slá inn notandanafnið þitt í **Notandanafn** reitinn.
7. Notaðu lykilorðið til að slá inn lykilorðið þitt í **Lykilorð** reitinn.
8. Veldu **Innskráning** hnappinn.
9. Veldu **Öryggisafrit** hnappinn.
Dagsetningin sem afritið er gert og hvaða tæki afritið er gert af birtist vinstra megin við hnappinn Afrita þegar afritun er lokið.
10. Veldu hnappinn  (Loka) til að hætta.

Eyða kreditkortaupplýsingum



Upplýsingarnar kunna að sýna grafík úr iOS, en leiðbeiningin er sú sama fyrir iPadOS.

Til að fjarlægja greiðsluaðferð úr Apple-reikningnum þínum skaltu fylgja þessari leiðbeiningu:

| Tungumál | Tengill |
|---------------------|---|
| Enska | https://support.apple.com/en-us/118291 |
| Þýska | https://support.apple.com/de-de/118291 |
| Franska | https://support.apple.com/fr-fr/118291 |
| Spænska | https://support.apple.com/es-mx/118291 |
| Hollenska | https://support.apple.com/nl-nl/118291 |
| Sænska | https://support.apple.com/sv-se/118291 |
| Norska | https://support.apple.com/no-no/118291 |
| Danska | https://support.apple.com/da-dk/118291 |
| Einfölduð kínverska | https://support.apple.com/zh-cn/118291 |
| Japanska | https://support.apple.com/ja-jp/118291 |
| Ítalska | https://support.apple.com/it-it/118291 |
| Finnska | https://support.apple.com/fi-fi/118291 |
| Arabíska | https://support.apple.com/ar-sa/118291 |
| Búlgarska | https://support.apple.com/bg-bg/118291 |
| Pólska | https://support.apple.com/pl-pl/118291 |
| Slóvenska | https://support.apple.com/sl-si/118291 |
| Eistneska | https://support.apple.com/et-ee/118291 |
| Portúgölska | https://support.apple.com/pt-pt/118291 |
| Króatíska | https://support.apple.com/hr-hr/118291 |

Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækið þitt

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörnunni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluaðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Valkvætt: Prentaðu TD Snap-síður fyrir samskipti

Á meðan tækið þitt er í viðgerð er gagnlegt að hafa prentuð samskiptaborð til taks. Mælt er með að prenta eftirfarandi síður: lykklaborð, kjarnorð, Quickfires og efnisíður sem þú notar oftast.

Ef þú ert ekki með prentara tengdan við tækið þitt, fylgdu leiðbeiningunum til að vista PDF-skránnar í iCloud, senda þær með tölvupósti eða Airdrop til sjálfs þín til að prenta úr öðru tæki.

Fyrirfram gerð prentvæn samskiptaborð eru einnig fáanleg til niðurbætur í kaflanum. *Tilföng, síða 9*



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Veldu **Síða** flipann.



3. Veldu **Prenta** í tækjastikunni hægra megin á skjánum. Veldu síður til að prenta svar opnast. Þú getur einnig prentað frá **Prenta síður** svæðinu í síðuflípanum.
4. Núverandi síðu er bætt við prentunarröðina sjálfkrafa. Veldu fleiri síður úr listanum til að bæta þeim við prentunarröðina.
 - Sláðu inn í leitarreitinn til að leita að heiti síðu.
 - Til að bæta öllum síðunum úr núverandi leitarniðurstöðum í prentunarröðina, veldu **Velja allt**.
 - Ef þú velur **Velja allt** og afhakar síðan **Velja allt** mun prentunarröðin endurstillast.
 - Til að fjarlægja síður úr prentunarröðinni veldu **X** við hliðina á heiti síðu.
5. Þegar búið að velja síður fyrir prentunarröðina veldu **Næst**.




6. Veldu þína prentarastillingar. Síðu forskoðun uppfærast til að sýna núverandi stillingar.



- **Skilaboðaslá:** Aftengdu þessar stillingar til að fela skilaboðaslána á prentuðu síðunni/síðunum.
 - **Verkfærastíka:** Aftengdu þessar stillingar til að fela tækjastíkuna á prentuðu síðunni/síðunum.
 - **Sýnileiki tengils:** Aftengdu þessar stillingar til að fela tenglavísatákn á tenglahnöppum á prentuðu síðunni/síðunum.
 - **Hnappanotkunartalning:** Virkjaðu þessa stillingu til að sýna núverandi hnappanotkunartalningu á prentuðu síðunni/síðunum. Athugaðu: Gagnarakning þarf að vera virkjuð til að sýna hnappanotkunartalningu.
7. Þegar þú hefur lokið að velja þínar prentarastillingar veldu **Prenta**.
 8. Prenta eða vista sem PDF.
 - Sendu til prentarans þíns: Veldu prentarann þinn og stilltu upphaldsstillingarnar þínar, og veldu síðan **Prenta**.




- Vista sem PDF: Veldu  Deila, veldu síðan hvort þú sendir PDF-skjalið til þín með AirDrop, Messages eða Mail, eða veldu Vista í Skrár til að vista það á iCloud-drifinu þínu. Opnaðu PDF-skjalið þitt á öðru tæki með prentunarmöguleika og prentaðu það.


Valkvætt: Prenta TD Talk síður fyrir samskipti


Þú þarft að ganga úr skugga um að AirPrint-samhæfður prentarinn þinn og TD Navio séu tengdir sama Wi-Fi-neti. Til að prenta úr TD Talk skaltu fylgja þessum skrefum.

1. Farðu á síðuna til að prenta í TD Talk.
2. Ýttu á **Aflrofi** hnappinn og **hljóðstyrkur +** eða **hljóðstyrkur -** hnappana á sama tíma.
3. Veldu nýja litla gluggann sem inniheldur skjámyndina í neðra vinstra horni skjásins.

4. Veldu hnappinn  (Deila).

5. Veldu hnappinn  (Prenta).
6. Prenta eða vista sem PDF.


- **Sendu til prentarans þíns:** Veldu prentarann þinn og stilltu upphaldsstillingarnar þínar, og veldu  síðan (Prenta).


- **Vista sem PDF:** Veldu  (Deila), og veldu síðan hvort þú sendir PDF-skjalið til þín sjálf með AirDrop, Messages eða Mail, eða veldu Vista í Skrár til að vista það á iCloud-drifinu þínu. Opnaðu PDF-skjalið þitt á öðru tæki með prentunarmöguleika og prentaðu það.

Valkvætt: Sæktu forrit á tímabundið tæki

Ef þú hefur aðra samhæfa græju tiltæka, til dæmis iPad, geturðu hlaðið niður samskiptforritunum þínum og endurheimt afritaða notendagögnin þín til að halda áfram að eiga samskipti á meðan TD Navio-tækið þitt er í viðgerð.


Sæktu TD Snap

1. Frá heimaskjánum, opnaðu AppStore ()
2. Veldu flipann Leita

Leitaðu að **TD Snap** ()

3. Veldu hnappinn **Fá** við hliðina á TD Snap-forritinu.
4. Veldu hnappinn **Sæta**.
5. Sláðu inn Apple ID-lykilorðið þitt.
6. Veldu **Staðfesta** hnappinn.
7. Veldu **Opið**-hnappinn þegar niðurhalið er lokið.

Sækja TD Talk

1. Frá heimaskjánum, opnaðu AppStore ()

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörnunni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluaðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

2. Veldu flipann Leita



Leitaðu að **TD Talk** (

3. Veldu hnappinn **Fá** sem er við hliðina á TD Talk-forritinu.
4. Veldu hnappinn **Sæta**.
5. Sláðu inn Apple ID-lykilorðið þitt.
6. Veldu **Staðfesta** hnappinn.
7. Veldu **Opið**-hnappinn þegar niðurhalið er lokið.

Endurheimtu TD Snap-notandann þinn

Áður en þú lýkur skrefunum hér að neðan, farðu í TD Snap í *Breyta > Notandi > myTobiiDynavox-reikningur* og skráðu þig inn með myTobiiDynavox-notendaupplýsingunum þínum. Þetta gerir talmögulegt á þessu tæki með einu af fylgileyfnum sem fylgja með TD Navio þínum.

Til að stjórna fylgileyfum þínum skaltu heimsækja myTobiiDynavox.com, skrá þig inn og velja *Mitt reikningur > Leyfi*.

Endurheimta notanda frá myTobiiDynavox



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu örina hægra megin við núverandi notanda.
4. Veldu **Nýr notandi**.
5. Veldu **Endurheimta Núverandi Notanda**.
6. Þú ert ekki skráður/ur inn á myTobiiDynavox, settu inn netfangið þitt og aðgangsorð og veldu síðan **Næst**.
7. Veldu notandaöryggisafritaskrá úr listanum og veldu síðan **Næst**.

Endurheimta notanda frá staðbundinni skrá


Athugaðu: Áður en þú lýkur skrefunum hér að neðan, verður þú að afrita afritaskránni þinni með .sub-viðbótinni í *Skrár > Á iPad-inu mínu > TD Snap > Notendaafrit*



1. Veldu **Breyta** hnappinn.
2. Velja **Notandi** flipann.
3. Veldu örina hægra megin við núverandi notanda.
4. Veldu **Nýr notandi**.
5. Veldu **Endurheimta Núverandi Notanda**.
6. Veldu **Endurheimta frá staðbundinni skrá**.
7. Veldu afrit af notendaskrá úr listanum, og veldu svo **Endurheimta notanda**.

Endurheimta TD Talk-notandann þinn

1. Festu augnarráð þitt á skjáinn, á miðja augnstýringuna, eða flötinn í kringum augnstýringuna.

Hnappurinn  (Mælaborð) verður sýnilegur í neðri miðhluta skjásins.

2. Veldu hnappinn  (Mælaborð) til að opna mælaborðið.

3. Veldu aðgerðina  (Stillingar) til að opna TD Talk-stillingarnar.



- Leitaðu að táknum (Innskrá) í efra vinstra horni skjásins.
- Notaðu lykilorðið til að slá inn notandanafnið þitt í **Notandanafn** reitinn.
- Notaðu lykilorðið til að slá inn lykilorðið þitt í **Lykilorð** reitinn.
- Veldu **Innskráning** hnappinn.
- Veldu **Endurheimta** hnappinn.
Dagsetningin sem endurheimt er gerð mun birtast til vinstri við Endurheimta-hnappinn þegar endurheimt er lokið.
- Veldu hnappinn (Loka) til að hætta.

Byrjaðu viðgerðarferlið

Teymið okkar mun leiða þig í gegnum næstu skref, þar á meðal pakka tækinu þínu og setja upp ókeypis sendingu, og veita þér stuðning allan viðgerðarferilinn.

Til að hefja ferlið, vinsamlegast fylltu út á netinu endurköllunareyðublaðið:

- Alþjóðlegt:** <https://www.tobiidynavox.com/pages/td-navio-recall>
- OKKUR** <https://us.tobiidynavox.com/pages/td-navio-recall>
- SE:** <https://se.tobiidynavox.com/pages/td-navio-recall>

Einnig geturðu haft samband við þjónustuverið í síma eða með tölvupósti. Vinsamlegast hafið raðnúmer TD Navio tilbúið. Röðunúmerið er neðst og til hægri við útfellanlega fótinn á botni tækisins.

Alþjóðaskrifstofa

Sími: +46 (0)8 522 950 20

Vinnutími: Mán.–fös., 9:00–17:00 (CET)

Netfang: support.eu@tobiidynavox.com

Skrifstofa Norður-Ameríku

Sími: +1-800-344-1778, valkostur 1

Vinnutími: Mán.–fim., kl. 9–21 (ET)

Netfang: support.na@tobiidynavox.com

Hvað á ég að senda með tækinu mínu?

Vinsamlegast sendið eingöngu TD Navio-tækið sjálf.

- Ekki innifela hleðslutæki, kapla, aukahluti eða annað búnað.
- Láttu verndartöskuna vera á tækinu.

Þú munt fá skýr fyrirmæli um sendingu, þar á meðal leiðbeiningar um pökkun, þegar viðgerðarleyfi (innan Bandaríkjanna) eða leyfi til viðgerðarvöru (utan Bandaríkjanna) er veitt.

Endurheimt eftir viðgerð

Ef tækið þitt var endurstílt á meðan á viðgerð stóð, fylgdu leiðbeiningunum hér að neðan til að endurheimta tækið þitt úr öryggisafritum. Flest tæki eru ekki endurstílt við viðgerð, svo framkvæmdu þessi skref aðeins ef nauðsyn krefur.

Endurheimta tækið þitt úr afriti



Upplýsingarnar kunna að sýna grafík úr iOS, en leiðbeiningin er sú sama fyrir iPadOS.

Til að endurheimta tækið þitt úr afriti skaltu fylgja þessari leiðbeiningu:

Tungumál

Enska

Tengill

<https://support.apple.com/en-us/118105>

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörnunni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluáðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluáðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

| | |
|---------------------|---|
| Dýska | https://support.apple.com/de-de/118105 |
| Franska | https://support.apple.com/fr-fr/118105 |
| Spænska | https://support.apple.com/es-mx/118105 |
| Hollenska | https://support.apple.com/nl-nl/118105 |
| Sænska | https://support.apple.com/sv-se/118105 |
| Norska | https://support.apple.com/no-no/118105 |
| Danska | https://support.apple.com/da-dk/118105 |
| Einfölduð kínverska | https://support.apple.com/zh-cn/118105 |
| Japanska | https://support.apple.com/ja-jp/118105 |
| Ítalska | https://support.apple.com/it-it/118105 |
| Finnska | https://support.apple.com/fi-fi/118105 |
| Arabíska | https://support.apple.com/ar-sa/118105 |
| Búlgarska | https://support.apple.com/bg-bg/118105 |
| Pólska | https://support.apple.com/pl-pl/118105 |
| Slóvenska | https://support.apple.com/sl-si/118105 |
| Eistneska | https://support.apple.com/et-ee/118105 |
| Portúgölsk | https://support.apple.com/pt-pt/118105 |
| Króatíska | https://support.apple.com/hr-hr/118105 |
| Íslenska | https://support.apple.com/is-is/118105 |
| Hebreska | https://support.apple.com/he-il/118105 |

Tilföng

Prenta leiðbeiningar fyrir skilti

AAC-notandinn getur snert hluti á samskiptaborðinu. Notaðu bókstafina á samskiptaborðinu til að stafsetja orð. Ef það er erfitt að snerta hluti, má nota borðið með maki á eftirfarandi hátt.

1. Staðfestu hvernig AAC-notandinn gefur til kynna "já". Þetta gæti verið með því að segja já, kinka kolli, líta upp o.s.frv. Spyrðu einnig hvort notandi AAC vilji að samskiptisaðilinn giska á hvað hann er að stafsetja eða ekki.
2. Makinn bendir á hverja röð í röð og spyr: "Er þetta þessi röð?" eða nefnir röðina eftir númeri eða staf ("Er þetta röð 1?", "Er þetta A-rað?"). Pásuðu á milli lína til að gefa AAC-notandanum tíma til að svara.
3. AAC-notandinn bendir á "já" þegar maki hans hefur náð þeirri línu sem hann vill. Ef notandi AAC bendir ekki á "já", farðu aftur yfir röðurnar.
4. Makinn bendir á og nefnir hlutina í tilgreindri röð ("Er það A?", "Er það B?", "Er það villa?", o.s.frv.).
5. AAC-notandinn bendir á "já" þegar maki hans hefur fundið það sem hann vill. Ef notandi AAC bendir ekki á "já", skaltu fara aftur yfir atriðin í þeirri röð.
6. Endurtaktu skref 2–5 þar til AAC-notandinn hefur lokið við að senda skilaboð sín.

Afríkanska

| Síðusettt | URL |
|-----------|---|
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_af_ZA.pdf |

Arabíska

| Síðusetting | URL |
|------------------------|---|
| Skoðun með aðstoð maka | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_ar.pdf |
| Core First 5x5 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_ar.pdf |
| Core First 6x6 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_ar.pdf |
| Core First 7x7 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_ar.pdf |
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_ar.pdf |

Búlgarska

| Síðusetting | URL |
|------------------------|---|
| Skoðun með aðstoð maka | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_bg-BG.pdf |

Danska

| Síðusetting | URL |
|------------------------|---|
| Skoðun með aðstoð maka | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_da.pdf |
| Core First 5x5 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_da.pdf |
| Core First 6x6 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_da.pdf |
| Core First 7x7 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_da.pdf |
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_da_DK.pdf |
| Texti | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_da.pdf |

Hollenska

| Síðusetting | URL |
|------------------------|---|
| Skoðun með aðstoð maka | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_nl.pdf |

Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækid þitt

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörnunni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluaðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

| Síðusettt | URL |
|----------------|---|
| Core First 5x5 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_nl.pdf |
| Core First 6x6 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_nl.pdf |
| Core First 7x7 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_nl.pdf |
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_nl_NL.pdf |
| Texti | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_nl.pdf |

Enska - Ástralía

| Síðusettt | URL |
|---------------|---|
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en_AU.pdf |
| Motor Plan 30 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en_AU.pdf |
| Motor Plan 40 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en_AU.pdf |
| Motor Plan 66 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en_AU.pdf |

Enska - Stóra-Bretland

| Síðusettt | URL |
|----------------|---|
| Málstol | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_en-UK.pdf |
| Core First 5x5 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_en-UK.pdf |
| Core First 6x6 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_en-UK.pdf |
| Core First 7x7 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_en-UK.pdf |
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en_UK.pdf |
| Motor Plan 30 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en_UK.pdf |

Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækið þitt

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörnunni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluaðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

| Síðusettt | URL |
|---------------|---|
| Motor Plan 40 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en_GB.pdf |
| Motor Plan 66 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en_GB.pdf |

Enska (Bandaríkin)

| Síðusettt | URL |
|------------------------|---|
| Skimun með aðstoð maka | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_en.pdf |
| Málstol | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_en-US.pdf |
| Core First 5x5 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_en-US.pdf |
| Core First 6x6 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_en-US.pdf |
| Core First 7x7 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_en-US.pdf |
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en-US.pdf |
| Motor Plan 30 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en-US.pdf |
| Motor Plan 40 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en-US.pdf |
| Motor Plan 66 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en-US.pdf |
| Texti | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_en.pdf |

Eistneska

| Síðusettt | URL |
|------------------------|---|
| Skoðun með aðstoð maka | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_et-EE.pdf |

Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækið þitt

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörinni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluaðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

| Síðusettt | URL |
|-----------|---|
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_et_EE.pdf |

Finnska

| Síðusettt | URL |
|------------------------|---|
| Skoðun með aðstoð maka | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_fi.pdf |
| Core First 5x5 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fi.pdf |
| Core First 6x6 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fi.pdf |
| Core First 7x7 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fi.pdf |

Franska (Frakkland)

| Síðusettt | URL |
|------------------------|---|
| Skoðun með aðstoð maka | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_fr.pdf |
| Málstol | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_fr_FR.pdf |
| Core First 5x5 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fr-FR.pdf |
| Core First 6x6 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fr-FR.pdf |
| Core First 7x7 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fr-FR.pdf |
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_fr_FR.pdf |
| Texti | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_fr.pdf |

Franska - Kanada

| Síðusettt | URL |
|----------------|---|
| Core First 5x5 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fr-CA.pdf |
| Core First 6x6 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fr-CA.pdf |
| Core First 7x7 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fr-CA.pdf |

Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækið þitt

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörnunni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluaðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

| Síðusettt | URL |
|-----------|---|
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_fr_CA.pdf |

Þýska

| Síðusettt | URL |
|------------------------|---|
| Skoðun með aðstoð maka | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_de.pdf |
| Málstol | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_de_DE.pdf |
| Core First 5x5 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_de-DE.pdf |
| Core First 5x5 (PCS) | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_PCS_de.pdf |
| Core First 6x6 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_de-DE.pdf |
| Core First 6x6 (PCS) | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_de_PCS.pdf |
| Core First 7x7 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_de-DE.pdf |
| Core First 7x7 (PCS) | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_PCS_de.pdf |
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_de_DE.pdf |
| Express METACOM | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_de-DE-Metacom.pdf |
| Motor Plan 30 METACOM | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_METACOM_de-DE.pdf |
| Mótorplanið 30 PCS | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_PCS_all_de_DE.pdf |
| Motor Plan 40 METACOM | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_de-DE-Metacom.pdf |
| Motor Plan 40 PCS | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_PCS_all_de_DE.pdf |

Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækið þitt

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörnunni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluaðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

| Síðuset | URL |
|-----------------------|---|
| Motor Plan 66 METACOM | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_de-DE-Metacom.pdf |
| Motor Plan 66 PCS | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66-PCS_all_de_DE.pdf |
| Texti | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_de.pdf |

Hebreska

| Síðuset | URL |
|-------------------------|---|
| Skoðun með aðstoð maka | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_he-IL.pdf |
| Core First 5x5 Kvenkyns | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_female_he-IL.pdf |
| Core First 5x5 Karlkyns | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_male_he-IL.pdf |
| Core First 6x6 Kvenkyns | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_female_he-IL.pdf |
| Core First 6x6 Karlkyns | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_male_he-IL.pdf |
| Core First 7x7 Kvenkyns | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_female_he-IL.pdf |
| Core First 7x7 Karlkyns | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_male_he-IL.pdf |

Íslenska

| Síðuset | URL |
|-------------------------|---|
| Skoðun með aðstoð maka | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_is-IS.pdf |
| Core First 5x5 Kvenkyns | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_female_is-IS.pdf |

Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækid þitt

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörnunni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluaðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

| Síðusettt | URL |
|-------------------------|---|
| Core First 5x5 Karlkyns | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_male_is-IS.pdf |
| Core First 6x6 Kvenkyns | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_female_is-IS.pdf |
| Core First 6x6 Karlkyns | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_male_is-IS.pdf |
| Core First 7x7 Kvenkyns | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_female_is-IS.pdf |
| Core First 7x7 Karlkyns | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_male_is-IS.pdf |
| Express (kvenkyns) | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_is-IS-female.pdf |
| Express (karlkyns) | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_is-IS-male.pdf |
| Texti | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_is-IS.pdf |

Írska

| Síðusettt | URL |
|-----------|---|
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_ga_IE.pdf |

Ítalska

| Síðusettt | URL |
|------------------------|---|
| Skoðun með aðstoð maka | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_it.pdf |
| Málstol | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_it_IT.pdf |
| Core First 5x5 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_it-IT.pdf |
| Core First 6x6 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_it-IT.pdf |
| Core First 7x7 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_it-IT.pdf |

Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækið þitt

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörnunni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluaðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

| Síðuset | URL |
|---------|---|
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_it_IT.pdf |
| Texti | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_it.pdf |

Japanska

| Síðuset | URL |
|-------------------------|---|
| Core First 5x5 Hiragana | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_Hiragana_ja.pdf |
| Core First 5x5 Kanji | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_Kanji_ja.pdf |
| Core First 6x6 Hiragana | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_Hiragana_ja.pdf |
| Core First 6x6 Kanji | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_Kanji_ja.pdf |
| Core First 7x7 Hiragana | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_Hiragana_ja.pdf |
| Core First 7x7 Kanji | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_Kanji_ja.pdf |
| Express Hiragana | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_Hiragana_ja.pdf |
| Express Kanji | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_Kanji_ja.pdf |

Norska

| Síðuset | URL |
|------------------------|---|
| Skoðun með aðstoð maka | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_no.pdf |
| Core First 5x5 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_no.pdf |
| Core First 6x6 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_no.pdf |
| Core First 7x7 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_no.pdf |

Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækid þitt

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörinni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluáðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluáðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

| Síðusetting | URL |
|-------------|---|
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_nb_NO.pdf |
| Texti | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_no.pdf |

Pólska

| Síðusetting | URL |
|------------------------|---|
| Skimun með aðstoð maka | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_pl.pdf |
| Core First 5x5 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_pl.pdf |
| Core First 6x6 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_pl.pdf |
| Core First 7x7 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_pl.pdf |
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_pl.pdf |

Portúgalska (Portúgal)

| Síðusetting | URL |
|------------------------|---|
| Skoðun með aðstoð maka | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_pt.pdf |
| Core First 5x5 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_pt.pdf |
| Core First 6x6 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_pt.pdf |
| Core First 7x7 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_pt.pdf |
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_pt_PT.pdf |
| Texti | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_pt.pdf |

Slóvenska

| Síðusetting | URL |
|------------------------|---|
| Skoðun með aðstoð maka | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_sl-SL.pdf |

Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækid þitt

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörnunni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluaðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

| Síðuset | URL |
|--------------------|---|
| Express (kvenkyns) | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_female_sl-SL.pdf |
| Express (karlkyns) | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_male_sl-SL.pdf |

Spænsku - Mexíkó

| Síðuset | URL |
|---------------|---|
| Málstol | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_es_MX.pdf |
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_es_MX.pdf |
| Motor Plan 30 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_es_MX.pdf |
| Motor Plan 40 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_es_MX.pdf |
| Motor Plan 66 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_es_MX.pdf |
| Texti | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_es-MX.pdf |

Spænska (Spánn)

| Síðuset | URL |
|------------------------|---|
| Skoðun með aðstoð maka | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_es.pdf |
| Málstol | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_es-ES.pdf |
| Core First 5x5 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_es.pdf |
| Core First 6x6 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_es.pdf |
| Core First 7x7 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_es.pdf |
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_es_ES.pdf |

Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækid þitt

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörinni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluaðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

| Síðusettt | URL |
|---------------|---|
| Motor Plan 30 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_es_ES.pdf |
| Motor Plan 40 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_es_ES.pdf |
| Motor Plan 66 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_es_ES.pdf |
| Texti | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_es.pdf |

Sænska

| Síðusettt | URL |
|------------------------|---|
| Skoðun með aðstoð maka | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_sv.pdf |
| Core First 5x5 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_sv.pdf |
| Core First 6x6 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_sv.pdf |
| Core First 7x7 | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_sv.pdf |
| Express | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_sv_SE.pdf |
| Texti | https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_sv.pdf |

Stuðningur fyrir Tobii Dynavox tækið þitt

Fáðu hjálp á netinu

Sjáðu vörusértækar stuðningssíður fyrir Tobii Dynavox tæki þitt. Hún inniheldur dagréttar upplýsingar um vandamál og ábendingar og ráð sem tengjast vörinni. Finndu stuðningssíður okkar á netinu á: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Hafðu samband við lausnaráðgjafa þinn eða endursöluaðila

Sérðu með spurningar eða vandamál varðandi vöruna, skaltu hafa samband við lausnaráðgjafa Tobii Dynavox eða heimilaðan endursöluaðila. Þeir hafa mesta þekkingu á persónulegri uppsetningu þinni og eiga þess vegna best með að hjálpa þér með ábendingum og þjálfun í notkun vörunnar. Tengiliðaupplýsingar færðu hjá <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.