



TD Talk et AssistiveTouch

Fiches de familiarisation



L'application TD Talk vous permet de participer à des conversations en face à face.




AssistiveTouch vous donne accès à d'autres applications.

Table des matières

- 1** TD Talk - Présentation rapide
- 2** TD Talk - Conseils en matière de communication
- 3** TD Talk - Conseils en matière de communication (suite)
- 4** TD Talk - Idées de pratique
- 5** AssistiveTouch - Utiliser des applications
- 6** AssistiveTouch - Idées de pratique
- 7** Montage, position et affiner la commande oculaire
- 8** Affiner la commande oculaire (suite)
- 9** FAQ et ressources supplémentaires

TD Talk - Présentation rapide

TD Talk est conçu pour une communication rapide et en face à face. Utilisez cette application lorsque vous interagissez avec d'autres personnes.

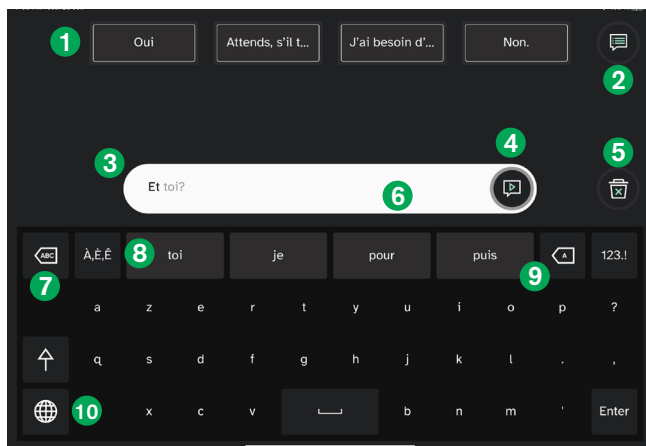

1 Messages rapides

Messages pré-écrits qui sont énoncés immédiatement lorsqu'ils sont sélectionnés.

2 Autres messages rapides

Ouvrez la page Messages rapides pour énoncer ou modifier vos messages rapides.

3 Fenêtre de message

Affichez et modifiez le texte que vous souhaitez énoncer ici.

4 Énoncer

Énoncer le texte de la fenêtre de message. Vous pouvez également mettre en pause et reprendre l'énonciation.

5 Effacer

Effacer tout le texte de la fenêtre de message.

6 Prédiction de phrases

TD Talk retient ce que vous saisissez et utilise ces informations afin de prédire des phrases. La prédiction est basée sur la fréquence et accélère la communication, tout en la rendant plus personnelle.

7 Supprimer un mot

Supprimer le mot qui se trouve à gauche du curseur.

8 Prédiction de mots

Prédit automatiquement des mots en fonction de ce que vous avez saisi jusqu'à présent.

9 Retour arrière


Supprimer le caractère qui se trouve à gauche du curseur.

10 Modifier la langue

Basculer entre les langues que vous parlez.



TD Talk - Présentation rapide (suite)

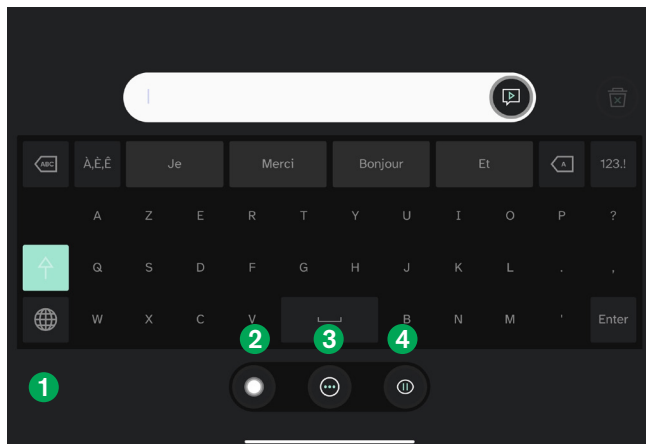

1 Menu hors écran

Posez votre regard sous la commande oculaire afin d'afficher ce menu contenant les fonctions Mettre en pause/Reprendre, Autres et AssistiveTouch.

2 Activer ou désactiver AssistiveTouch

Activer AssistiveTouch. Utilisez AssistiveTouch pour accéder à l'écran d'accueil et à toutes vos autres applications.

3 Autres

Accéder au tableau de bord et aux paramètres.


4 Mettre en pause/Reprendre la commande oculaire

Appuyez sur le bouton de basculement pour mettre temporairement en pause, puis reprendre l'utilisation de la commande oculaire.



TD Talk - Conseils en matière de communication

Ces conseils peuvent vous aider à utiliser TD Talk de manière efficace.

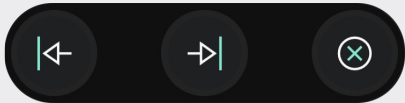Conseils	Essayez ce qui suit
<p>Faites régulièrement des pauses lorsque vous utilisez la commande oculaire.</p> <p>Mettez la commande oculaire en pause lorsque vous ne parlez pas et reprenez son utilisation lorsque vous êtes prêt à parler.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Posez votre regard sous la commande oculaire afin d'ouvrir le menu hors écran.2 Sélectionnez Mettre en pause. La commande oculaire est mise en pause.3 Répétez les étapes indiquées ci-dessus pour reprendre l'utilisation de la commande oculaire.
<p>Éditer les messages directement dans la fenêtre de message.</p> <p>Corrigez, supprimez ou ajoutez des mots n'importe où dans la fenêtre de message à l'aide du menu Édition.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1 Posez votre regard sur la partie de la phrase que vous souhaitez modifier. Le mot est souligné, puis le menu Édition s'affiche.2 Lorsqu'un mot est mis en surbrillance, vous pouvez effectuer ce qui suit : Remplacer le mot. Sélectionnez l'un des mots prédits ou saisissez des lettres. Supprimer le mot. Sélectionnez Retour arrière. Déplacer le curseur. Utilisez les flèches de droite et de gauche du menu Édition afin de déplacer le curseur, puis effectuez une saisie pour insérer du texte.3 Sélectionnez X pour fermer le menu Édition.



TD Talk - Conseils en matière de communication (suite)


Conseils

Utilisez la ponctuation et les lettres majuscules uniquement si elles améliorent le contenu de votre message.

La saisie des points et des majuscules exige du temps et des efforts. Ils ne font aucune différence dans la façon dont votre message est énoncé, à moins que ces points ne soient utilisés pour séparer les phrases d'un paragraphe.

Profitez de la prédiction de mots.

La fonction de prédiction de mots retient ce que vous saisissez et peut accélérer votre communication.

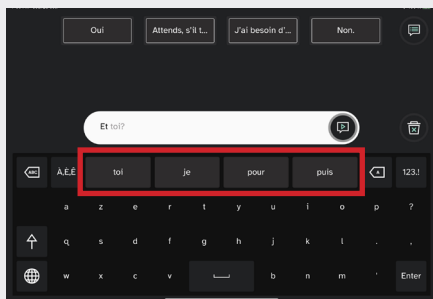


Essayez ce qui suit

- Utilisez ? ou ! pour que votre message soit énoncé sous forme de question ou d'exclamation.
- Les virgules insèrent des pauses dans une phrase. Utilisez des virgules pour accentuer et définir un rythme.
- Les lettres majuscules ajoutent un impact visuel, mais ne changent pas la façon dont un mot est énoncé. TD Talk met automatiquement en majuscule la première lettre des phrases à votre place. À part cela, il est inutile de mettre des mots en majuscule, à moins que quelqu'un ne lise votre message.

- 1 Lorsque vous commencez à taper un mot, jetez un œil aux boutons de prédiction de mots afin de voir si le mot que vous souhaitez utiliser s'y trouve.
- 2 Recommencez toutes les 2 à 3 lettres.
- 3 Si vous constatez que vous effectuez une sélection involontaire lors de la lecture des mots prédits, augmentez la durée de sélection par fixation du regard pour la prédiction des mots dans *TD Talk* > *Paramètres* > *Clavier*.



TD Talk - Conseils en matière de communication (suite)

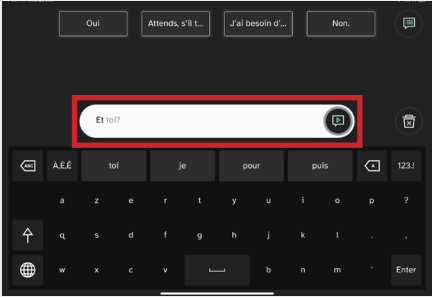Conseils	Essayez ce qui suit
<p>Saisir les mots tels que vous les énoncez.</p> <p>La grammaire du langage parlé diffère de celle plus formelle du langage écrit. Utilisez des phrases partielles et une grammaire facile qui reflètent votre discours.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ « Tu veux y aller ? »▪ « Je pourrais, tu sais, mais non merci ».▪ « La prochaine fois ».
<p>Utiliser la prédiction de phrases.</p> <p>La prédiction de phrases retient la façon dont vous assemblez les mots et prédit ce que vous voulez dire en fonction de la fréquence d'utilisation. Plus vous parlez en utilisant TD Talk, plus la prédiction de la phrase s'améliore afin que vous puissiez dire ce que vous voulez plus rapidement tout en fournissant moins d'efforts.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1 Jetez un œil à la fenêtre de message après avoir saisi un ou deux mots afin de voir si TD Talk a prédit une phrase.2 Si la phrase prédite correspond à celle que vous souhaitez utiliser, fixez votre regard sur le dernier mot de celle-ci pour l'accepter.3 Si la phrase prédite ne correspond pas à celle que vous souhaitez utiliser, continuez votre saisie.




TD Talk - Conseils en matière de communication (suite)

Conseils

Les messages rapides représentent souvent l'option de communication la plus rapide.

Utilisez ces messages modifiables pour exprimer des besoins immédiats, poursuivre une conversation et préparer ce que vous voulez dire à l'avance à l'occasion d'événements tels que des rendez-vous chez le médecin, des présentations et des réunions de famille.

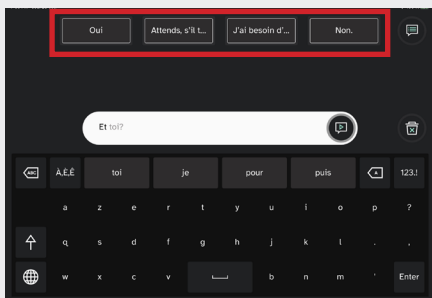

Essayez ce qui suit

- 1 Sélectionnez Autres messages rapides, puis Éditer les messages rapides.
- 2 Sélectionnez le message rapide que vous souhaitez éditer, puis saisissez vos modifications avec le clavier.
- 3 Sélectionnez Enregistrer et revenez à votre clavier principal.

Prenez le temps d'apprendre.

La commande oculaire est une compétence. La communication avec TD Talk deviendra de plus en plus automatique au fil du temps et de son utilisation.

- 1 Affinez votre commande oculaire en modifiant les paramètres au fur et à mesure que vous acquérez de nouvelles compétences.
- 2 Utilisez les idées de pratique de la section suivante afin de vous concentrer sur les compétences individuelles.



TD Talk - Idées de pratique

1 Pratiquer la mise en pause et la reprise de l'utilisation de la commande oculaire.

Posez votre regard sous la commande oculaire afin d'ouvrir le menu hors écran, puis sélectionnez le bouton de basculement Mettre la commande oculaire en pause. Répétez les mêmes étapes pour reprendre l'utilisation de la commande oculaire. Essayez plusieurs fois.

2 Pratiquer la saisie des mots tels que vous les énoncez.

Les phrases ci-dessous peuvent être utilisées dans une communication écrite formelle. Comment pourriez-vous les reformuler afin qu'elles puissent être utilisées dans une conversation décontractée ?

- Aujourd'hui, prenons un peu de temps pour parler des finances.
- Je vous souhaite beaucoup de succès.
- J'espère que vous êtes resté en bonne santé au cours de ces derniers mois.

Pensez aux phrases que vous utilisez souvent dans une conversation. Les exemples ci-dessous peuvent vous aider à en identifier quelques-unes. Saisissez-les dans TD Talk.

Exclamation

Impossible ! C'est intéressant. C'est ça ?!

Mots ou phrases explétifs

...comme..., euh..., je veux dire, vous savez, ...si cela veut dire quelque chose ... et tout ça.

Mots et phrases locaux

Il fait super chaud. Vous venez tous ?
Débarrasse la table.

3 Essayez de pratiquer la ponctuation et les majuscules.

Saisissez les phrases suivantes et écoutez la différence avec et sans ponctuation et lettres majuscules. Cette activité vous aidera à déterminer les situations où l'ajout de ponctuation et de majuscule est utile, ainsi que celles où vous pouvez l'ignorer pour gagner du temps.

	Option 1	Option 2
1	Je porterai une chemise, un jean et une veste.	Je porterai une chemise un jean et une veste
2	Puis-je l'avoir ?	Puis-je l'avoir ?
3	Il y a Jane là-bas.	Il y a Jane, là-bas.
4	J'aime ça mais pas lui	Génial, c'est incroyable
5	J'aime ça mais pas lui	J'aime ça, mais pas lui.



TD Talk - Idées de pratique (suite)

4 Essayer d'éditer des mots dans la fenêtre de message.

Tapez une phrase contenant une erreur intentionnelle (orthographe erronée, ajout d'un mot ou suppression d'un mot). Corrigez l'erreur en posant votre regard sur le mot dans la fenêtre de message.

5 Gagnez du temps grâce à la prédiction de mots.

Tapez « Je dois aller au café demain matin » sans utiliser la prédiction de mots. Ensuite, tapez à nouveau la phrase à l'aide de la prédiction de mots. Comparez le temps et les efforts requis.

6 Essayer d'utiliser la prédiction de phrases.

Saisissez l'une des phrases ci-dessous, puis énoncez-la cinq fois à voix haute avec TD Talk. La phrase sera alors ajoutée à votre ensemble de phrases. Effacez la fenêtre de message, puis recommencez à saisir la même phrase. La phrase prédite s'affiche alors. Posez votre regard sur le dernier mot de la phrase prédite pour la sélectionner, puis énoncez-la.

- Je m'appelle [votre nom].
- Mon adresse est [votre adresse].
- [Nom de la personne] est ma [relation].
- Je travaille (ou travaillais) à [employeur] en tant que [fonction]
- J'utilise cet appareil pour communiquer et je comprends tout ce que vous dites.

7 Utiliser et éditer les messages rapides.

Recherchez des messages rapides que vous pourriez utiliser dans les scénarios suivants.

- Si quelqu'un raconte une blague.
 - Si quelqu'un demande si vous avez aimé un film ou une émission de télévision.
 - Si vous avez besoin de quelque chose immédiatement.
 - Si quelqu'un commence à parler pendant que vous tapez un message.
 - Lorsque vous souhaitez obtenir davantage d'informations au cours d'une interaction.
- Éditez un message rapide en fonction de ce que vous diriez dans les situations ci-dessous.
- Vous faites part de vos préoccupations ou établissez une liste de questions à l'intention de votre médecin ou votre thérapeute.
 - Vous dites à un ami ou à un membre de la famille ce qui se passe ces derniers temps.
 - Vous donnez des instructions à votre aide-soignant.



AssistiveTouch - Utiliser des applications

Lorsque vous vous sentirez prêt à aller au-delà de TD Talk, vous utiliserez AssistiveTouch afin d'accéder aux autres applications sur votre iPad. Les paramètres et les comportements de la commande oculaire d'AssistiveTouch sont différents de ceux de TD Talk. Il vous faudra donc peut-être effectuer des ajustements dans iPad OS Settings.

Présentation rapide



Bouton AssistiveTouch

Ouvre le menu d'AssistiveTouch. Le menu du bouton AssistiveTouch flotte sur d'autres contenus de l'écran et peut être repositionné en fonction des besoins.

Menu AssistiveTouch

Outils de navigation accessibles par commande oculaire qui vous permettent d'appuyer, de faire défiler, de régler le volume, de basculer entre les applications et plus encore en utilisant votre regard.



Remarque : N'oubliez pas de consulter les fiches Affiner la commande oculaire si vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation d'AssistiveTouch.

1 Passer à AssistiveTouch depuis TD Talk.

Vous utiliserez AssistiveTouch afin de naviguer en dehors de TD Talk. AssistiveTouch s'éteindra automatiquement lorsque vous ouvrirez de nouveau TD Talk.

- Sur le clavier de TD Talk, posez votre regard sous la commande oculaire afin d'ouvrir le menu hors écran, puis sélectionnez le bouton de basculement d'AssistiveTouch. Le pointeur (cercle gris) apparaît alors sur l'écran et suit votre regard.
- Posez votre regard sur le bouton du menu AssistiveTouch jusqu'à ce que celui-ci s'ouvre.
- Posez votre regard sur Accueil dans le menu AssistiveTouch jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.



Activer ou désactiver AssistiveTouch



Menu AssistiveTouch




AssistiveTouch - Utiliser des applications (suite)

2 Faire des pauses dès que cela est nécessaire.

Mettez la commande oculaire en pause pour lire ou vous reposer, puis reprenez son utilisation lorsque vous le souhaitez.

- Posez votre regard sur le **bouton du menu AssistiveTouch** afin d'ouvrir celui-ci.
- Posez votre regard sur **Mise en pause de la fixation** afin de faire une pause.
- Répétez les étapes indiquées ci-dessus afin de reprendre l'utilisation de la commande oculaire..

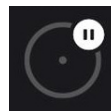

Mettre la fixation
par le regard en
pause

3 Utiliser l'iPad avec votre regard.

- Les fonctions Saisir et Faire défiler sont disponibles dans le menu AssistiveTouch de niveau supérieur. D'autres gestes tactiles tels que Maintenir et faire glisser, Appuyer longuement et Appuyer deux fois se trouvent sous Personnaliser dans le menu AssistiveTouch.
- Pour faire défiler l'écran, sélectionnez le **bouton du menu AssistiveTouch**, puis **Faire défiler**, ainsi que la **direction de défilement**. Ensuite, positionnez votre pointeur dans la zone de l'écran que vous souhaitez faire défiler.
- AssistiveTouch revient à l'action Appuyer si vous effectuez une action différente, telle que la mise en pause ou le défilement. Vous pouvez modifier l'action sur laquelle AssistiveTouch revient ou la supprimer complètement dans *iPad OS Settings > Accessibilité > Tactile > AssistiveTouch > Action de repli*.

4 Déplacer le bouton AssistiveTouch.

Il vous faudra peut-être déplacer le bouton AssistiveTouch ailleurs sur l'écran afin qu'il ne cause pas d'interférences. Sélectionnez **Déplacer le menu** dans le menu AssistiveTouch, puis maintenez votre regard sur l'emplacement de l'écran sur lequel vous souhaitez que le bouton du menu AssistiveTouch soit placé.


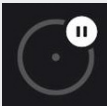

5 Choisissez les applications adéquates.

Posez-vous ces questions lorsque vous envisagez d'utiliser des applications à utiliser avec la commande oculaire.

- Disposez-vous des compétences (p. ex., appuyer, faire défiler, appuyer longuement) nécessaires pour utiliser l'application ?
- Si vous n'avez pas les compétences requises, l'application est-elle un bon moyen pour vous de pratiquer et de développer des compétences ?
- L'application présente-t-elle un grand intérêt ? Si vous êtes motivé, vous êtes plus susceptible de faire davantage d'efforts et de persévérer lorsque vous essayez d'accéder à des applications difficiles.
- Y a-t-il des paramètres dans iPad OS ou TD CoPilot qui peuvent contribuer à rendre l'application plus accessible avec la commande oculaire ? Consultez les fiches sur l'affinage de la commande oculaire afin d'obtenir des informations supplémentaires.
- Pouvez-vous configurer les paramètres de l'application afin qu'ils s'adaptent à vos capacités actuelles ? Cela peut inclure le passage du mode d'affichage portrait au mode d'affichage paysage, la modification des paramètres liés au temps de réponse ou au temps imparti dans les jeux, le remplacement des tâches complexes (sélectionner et faire glisser) par des tâches plus simples (sélectionner), ou l'affichage d'un nombre de choix réduit à l'écran.





AssistiveTouch - Idées de pratique

Idée de pratique	Essayez ce qui suit
<p>Activer AssistiveTouch depuis TD Talk.</p>  <p>Entraînez-vous à naviguer entre TD Talk et l'écran d'accueil à l'aide d'AssistiveTouch.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Posez votre regard sous la commande oculaire afin d'ouvrir le menu hors écran.2 Sélectionnez AssistiveTouch.3 Sélectionnez le bouton du menu AssistiveTouch, puis sélectionnez Accueil.
<p>Vous pouvez faire une pause en utilisant la fonction Mise en pause/Reprise de la fixation du regard.</p>  <p>Désactivez momentanément la sélection par fixation du regard de la commande oculaire afin de pouvoir lire, visionner une vidéo ou simplement vous détendre.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Sélectionnez le bouton du menu AssistiveTouch, puis sélectionnez Mettre la sélection par fixation du regard en pause.2 Si vous regardez l'écran, vous remarquerez que la sélection par fixation du regard est désactivée.3 Sélectionnez le bouton du menu AssistiveTouch, puis sélectionnez Reprendre la sélection par fixation du regard.
<p>Faire défiler avec votre regard.</p>  <p>Vous pouvez utiliser votre regard afin de faire défiler les pages Web, les menus, les listes, les applications et plus encore. Suivez les étapes indiquées à droite afin d'essayer de faire défiler l'écran de l'application iPad OS Settings.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Sélectionnez iPad OS Settings.2 Sélectionnez le bouton du menu AssistiveTouch, puis Faire défiler, et Faire défiler vers le bas.3 Effectuez votre sélection dans la fenêtre de l'application iPad OS Settings afin de faire défiler les paramètres vers le bas. <p>i Remarque : AssistiveTouch revient à l'action Appuyer si vous effectuez une action différente, telle que la mise en pause ou le défilement. Si vous souhaitez faire défiler à nouveau l'écran, répétez les étapes 2 et 3 indiquées ci-dessus.</p>



Assistive Touch - Idées de pratique (suite)

Idée de pratique	Essayez ce qui suit
<p>Déplacer le bouton du menu AssistiveTouch.</p>  <p>La position du bouton du menu AssistiveTouch est parfois gênante. Vous pouvez repositionner le bouton du menu AssistiveTouch à tout moment !</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Sélectionnez le bouton du menu AssistiveTouch, puis sélectionnez Déplacer le menu.2 Posez votre regard sur l'emplacement de l'écran sur lequel vous souhaitez positionner le bouton du menu Assistive Touch.3 Maintenez votre regard sur le bouton du menu AssistiveTouch pendant la durée de fixation définie afin de le déposer à cet emplacement.
<p>Essayer le Commutateur d'application.</p>  <p>La façon la plus rapide de naviguer entre les applications en cours d'exécution sur votre TD Pilot est d'utiliser le Commutateur d'application.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Sélectionnez le bouton du menu AssistiveTouch, puis sélectionnez Commutateur d'application.2 Vous verrez toutes les applications en cours d'exécution sur votre TD Pilot. Sélectionnez une application pour la lancer. <p>i Remarque : Si vous ne voyez pas l'application que vous recherchez dans le commutateur d'application, cela signifie que celle-ci n'est pas en cours d'exécution. Accédez à l'écran d'accueil et sélectionnez l'icône de l'application concernée afin de la lancer.</p>



Montage et position


Assurez-vous systématiquement qu'un support solide est en place.

Avant d'effectuer un dépannage supplémentaire, commencez toujours par procéder à un repositionnement et un recalibrage. La plupart des problèmes de commande oculaire sont résolus ou atténués au cours de ces deux étapes cruciales.

- Des lunettes propres doivent être portées, le cas échéant.
- Positionnez le dispositif de façon à ce que la personne soit positionnée confortablement. Utilisez le statut du suivi afin de vous assurer que le positionnement est adéquat.



Remarque : Pour ouvrir le statut du suivi, lancez TD CoPilot à partir de l'écran d'accueil ou demandez à un partenaire d'appuyer sur le bouton Statut du suivi situé gauche de la fenêtre du partenaire à l'arrière du dispositif TD Pilot.

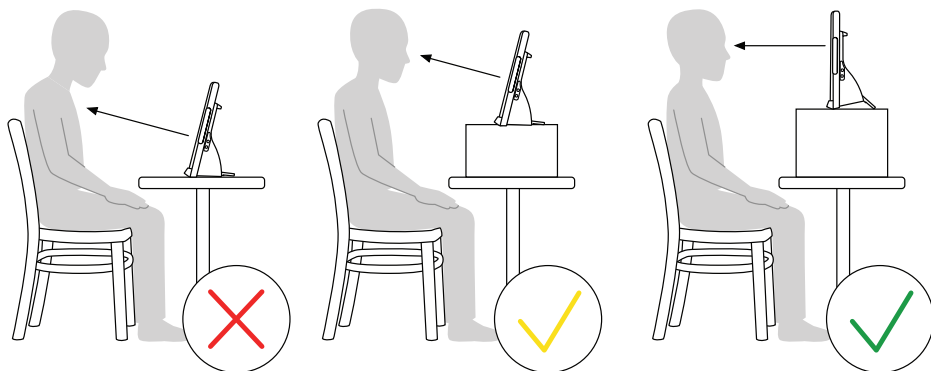

- Le dispositif TD Pilot doit être positionné à hauteur des yeux. Dans la plupart des cas, le dispositif TD Pilot doit être positionné à une hauteur supérieure à celle de la surface de la table ou du bureau où l'utilisateur est assis.
- Effectuez un recalibrage afin de tenir compte des changements qui surviennent tout au long de la journée dans l'éclairage ambiant, la position du corps, la fatigue et la réaction oculaire (probablement en raison de médicaments ou de sécheresse).



Affiner la commande oculaire

Examinez les problèmes suivants. Essayez une ou plusieurs solutions. Une combinaison de solutions constitue parfois l'option la plus efficace.

Problèmes	Solutions
La commande oculaire ne détecte pas les yeux.	<ul style="list-style-type: none">▪ Assurez-vous que TD Pilot est chargé et sous tension.▪ Assurez-vous que l'application AssistiveTouch est activée (suivez la procédure de configuration indiquée dans le Guide de mise en route de TD Pilot).▪ Assurez-vous que le câble reliant le dispositif TD Pilot à l'iPad est bien branché.▪ Vérifiez le positionnement de l'appareil et de la personne.▪ Consultez les informations sur les réflexions éblouissantes sur les lunettes.
L'exactitude n'est pas une bonne chose.	<ul style="list-style-type: none">▪ Vérifiez le positionnement de l'appareil et de la personne, puis recalibrez.▪ Examinez les solutions aux problèmes mentionnés ci-dessous. Plusieurs solutions peuvent s'appliquer.
La précision devient de moins en moins bonne avec le temps.	<ul style="list-style-type: none">▪ Recalibrer. Pensez à vérifier le positionnement avant de procéder à un recalibrage.▪ Regardez ailleurs ou fermez les yeux pendant un moment afin de vous concentrer de nouveau.▪ Diminuez la luminosité de l'écran : <i>iPad OS Settings > Affichage et luminosité</i>▪ Augmentez la taille du texte pour agrandir les cibles basées sur du texte : <i>iPad OS Settings > Affichage et luminosité > Taille du texte</i>▪ Reportez-vous à la section « Sensation de fatigue ou de sécheresse oculaire » ci-dessous.
La réflexion de lumière éblouissante sur les lunettes semble interférer.	<ul style="list-style-type: none">▪ Nettoyez les lunettes.▪ Limiter ou éliminer la lumière provenant de derrière la personne qui utilise le dispositif.▪ Si l'utilisateur porte des lentilles multifocales, essayez de repositionner le dispositif afin de tirer partie de la portion de la lentille destinée à l'utilisation d'ordinateurs.



Affiner la commande oculaire (suite)

Problèmes	Solutions
La réaction du pointeur est décalée.	<ul style="list-style-type: none">▪ Augmentez le paramètre de réactivité : <i>TD CoPilot > Paramètres > Assistive Touch</i>
Difficulté à maintenir la fixation du regard pendant une durée suffisante.	<ul style="list-style-type: none">▪ Raccourcir la durée de sélection par fixation du regard : <i>TD Talk > Paramètres > Clavier</i> <i>TD Talk > Paramètres > Activation</i> <i>iPad OS Settings > Accessibilité > Tactile > AssistiveTouch > Durée de la sélection par fixation du regard en secondes</i>▪ Augmentez la tolérance des mouvements : <i>iPad OS Settings > Accessibilité > Tactile > AssistiveTouch</i>▪ Diminuez le paramètre de réactivité : <i>TD CoPilot > Paramètres > Assistive Touch</i>
Les sélections se produisent trop rapidement ou accidentellement.	<ul style="list-style-type: none">▪ Augmentez la durée de sélection par fixation du regard dans TD Talk et/ou AssistiveTouch : <i>TD Talk > Paramètres > Clavier</i> <i>TD Talk > Paramètres > Activation</i> <i>iPad OS Settings > Accessibilité > Tactile > AssistiveTouch > Durée de la sélection par fixation du regard en secondes</i>▪ Augmentez la tolérance des mouvements : <i>iPad OS Settings > Accessibilité > Tactile > AssistiveTouch</i>
Le pointeur est instable ou décalé.	<ul style="list-style-type: none">▪ Diminuez le paramètre de réactivité : <i>TD CoPilot > Paramètres > Assistive Touch</i>▪ Supprimez la couleur du pointeur : <i>Durée de la sélection par fixation du regard en secondes > Accessibilité > Contrôle du pointeur > Couleur</i>▪ Ajustez la taille du pointeur : <i>Durée de la commande par fixation du regard en secondes > Accessibilité > Contrôle du pointeur > Couleur</i>
Le pointeur est invisible	<ul style="list-style-type: none">▪ Modifiez la taille et la couleur du pointeur afin qu'il ressorte : <i>iPad OS Settings > Accessibilité > Contrôle du pointeur</i>



Affiner la commande oculaire (suite)

Problèmes	Solutions
Le bouton du menu AssistiveTouch interfère ou distrait.	<ul style="list-style-type: none">▪ Déplacez le bouton du menu AssistiveTouch sur l'écran.▪ Diminuez l'opacité de veille du bouton du menu AssistiveTouch : <i>iPad OS Settings > Accessibilité > Tactile > AssistiveTouch</i>
Sensation de mal des transports.	<ul style="list-style-type: none">▪ Diminuez la luminosité de l'écran : <i>iPad OS Settings > Affichage et luminosité</i>▪ Supprimez la couleur du pointeur : <i>iPad OS Settings > Accessibilité > Contrôle du pointeur</i>▪ Activez le paramètre Réduire le mouvement : <i>iPad OS Settings > Accessibilité > Mouvement</i>▪ Activez le paramètre Préférer les transitions de fondu enchaîné : <i>iPad OS Settings > Accessibilité > Mouvement</i>
Reportez-vous à la section « Sensation de fatigue ou de sécheresse oculaire » ci-dessous.	<ul style="list-style-type: none">▪ Faire des pauses.▪ Réduire la luminosité : <i>iPad OS Settings > Affichage et luminosité</i>▪ Augmentez la taille du texte : <i>iPad OS Settings > Affichage et luminosité > Taille du texte</i>▪ Consultez un médecin.
Les yeux ne bougent pas en même temps (strabisme).	<ul style="list-style-type: none">▪ Identifiez l'œil le plus fort et effectuez le calibrage avec cet œil uniquement.▪ Consultez un médecin.
Mouvements oculaires involontaires (nystagmus).	<ul style="list-style-type: none">▪ Repositionnez le dispositif pour voir si le mouvement nystamoïde diminue dans une zone spécifique du champ de vision.



Foire aux questions

Puis-je utiliser AssistiveTouch dans TD Talk ?

En théorie, c'est possible, mais vous n'avez pas besoin de le faire. Les boutons de TD Talk se comportent comme des aimants. Lorsque votre regard se rapproche d'un bouton dans TD Talk, il attire le pointeur dessus. Cela vous permet d'être plus précis et réduit vos efforts. Activez AssistiveTouch lorsque vous souhaitez quitter TD Talk pour utiliser d'autres applications.

J'éprouve des difficultés à utiliser la commande oculaire. Que puis-je faire ?

Il existe plusieurs possibilités qui vous permettront d'améliorer la commande oculaire.

- Consultez les informations des fiches sur l'affinage de la commande oculaire. Essayez d'abord de repositionner ou de recalibrer avant de commencer à modifier les paramètres.
- Consultez les ressources au verso de cette carte.
- Contactez le thérapeute ou l'organisation qui vous a permis d'obtenir votre dispositif.

Comment fonctionne la prédiction des phrases dans TD Talk ?

La prédiction des phrases dans TD Talk est basée sur la fréquence. Les phrases que vous avez énoncées plusieurs fois auparavant sont prédites lorsque vous commencez à taper le début de la phrase. Cette fonction a tendance à prédire des phrases partielles (p. ex. : je vais, qu'est-ce que vous) plutôt que des phrases complètes (p. ex. : je vais au magasin. Qu'est-ce que vous aimez ajouter votre café ?) parce qu'elles sont utilisées dans une plus grande variété de situations et vous évitent d'avoir à les éditer trop souvent.



Ressources supplémentaires

Scannez les codes QR ou utilisez les liens.



Tobii Dynavox

fr.tobiidynavox.com



Apple

apple.com/fr/accessibility



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



Centre d'apprentissage
Tobii Dynavox (en
anglais uniquement).

learn.tobiidynavox.com



Communauté TD

qrco.de/TDFB



Page d'assistance de
TD Talk

qrco.de/TDTalkHelpFR



Manuel de l'utilisateur
de TD Pilot

qrco.de/PilotDocs



Documentation

*TD CoPilot > Paramètres
> Aide*



Contactez votre
représentant Tobii
Dynavox local pour obtenir
une aide technique.

