

TD Talk

Manual del usuario



tobiidynavox

Manual del usuario TD Talk

Versión 1.8

2025-07-08

Todos los derechos reservados.

Derechos de autor © Dynavox Group AB (publ)

Queda prohibido reproducir, almacenar en un sistema de recuperación o transmitir cualquier parte de este documento, de ninguna manera y mediante ningún medio (electrónico, fotocopiado, grabación o cualquier otro método), sin el consentimiento previo por escrito de la editorial.

La protección de los derechos de autor alegada incluye todas las formas y se refiere a todo el material y la información con derechos de autor permitidos por la ley estatutaria o judicial u otorgados por el presente documento, incluidos, pero sin limitarse a, material generado mediante programas de software y mostrado en la pantalla, como visualizaciones de pantalla, menús, etc.

La información contenida en este documento es propiedad de Dynavox Group AB. Queda prohibida cualquier reproducción total o parcial sin previa autorización por escrito de Dynavox Group AB.

Los productos a los que se hace referencia en este documento pueden ser marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Ni la editorial ni el autor asumen ninguna responsabilidad sobre estas marcas comerciales.

Aunque se han tomado todas las precauciones necesarias en la redacción de este documento, la editorial y el autor no se responsabilizan de posibles errores u omisiones, o daños derivados del uso de la información contenida en este documento o del uso de programas y códigos fuente que puedan acompañarlo. Bajo ninguna circunstancia se responsabilizará a la editorial ni al autor de posibles pérdidas de ganancias ni de ningún otro tipo de daño comercial causado o que se alegue que haya sido causado directa o indirectamente por este documento.

Contenido sujeto a cambio sin aviso previo.

Visite el sitio web de Tobii Dynavox.

www.TobiiDynavox.com para obtener una versión actualizada de este documento.

Información de contacto:

Dynavox Group AB
Löjtnantsgatan 25
115 50 Estocolmo
Suecia

+46 8 522 950 20

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
EE.UU.

+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
Reino Unido

+44 (0)114 481 00 11

Tobii Dynavox Pty. Ltd.
Operando como Link Assistive
11B MAB Eastern Promenade
Tonsley SA, 5042
Australia

+61 8 7120 6002

Tobii Dynavox (Suzhou) Co. Ltd
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP,
Suzhou
P.R.China 215021

+86 512 69362880



Tabla de contenidos

1	Bienvenido	6
1.1	Requisitos del sistema	6
1.2	Idiomas admitidos	6
1.3	Cómo obtener TD Suite	6
2	Recursos y soporte	7
2.1	Recursos y soporte en línea	7
2.2	Centro de aprendizaje.....	7
3	Para comenzar	8
3.1	Descripción general de TD Talk.....	8
3.2	El Menú oculto	9
3.2.1	¿Cómo acceder al Menú oculto en TD Talk?.....	9
3.3	Cuadro de mandos	10
3.3.1	¿Cómo acceder al Cuadro de mandos en TD Talk?.....	10
3.3.2	¿Cómo salir de TD Talk y cerrarlo?	10
3.4	Configuración de TD Talk	11
4	Uso de TD Talk.....	12
4.1	Uso del teclado	12
4.2	Uso de predicciones	12
4.2.1	Predicciones de palabras	12
4.2.2	Predicción de frases.....	13
4.3	Editar un mensaje	13
4.3.1	¿Cómo editar un mensaje en TD Talk?	13
4.4	Copiar y pegar	14
4.4.1	¿Cómo uso la función Copiar en TD Talk?	14
4.4.2	¿Cómo uso la función Pegar en TD Talk?	14
4.5	Uso de mensajes rápidos	14
4.5.1	¿Cómo utilizar los mensajes rápidos en TD Talk?.....	14
4.5.2	¿Cómo cambio el tema de los mensajes rápidos?	15
4.6	Cambio de idioma	16
4.6.1	¿Cómo cambiar los idiomas que deseo hablar en TD Talk?	16
4.7	Charla	16
4.8	Modo transparente.....	17
4.8.1	Cómo empiezo a ver el Modo transparente	17
4.8.2	¿Cómo finalizo el Modo transparente?	17
4.9	¿Cómo utilizar Expansiones de abreviaciones en TD Talk?	17
4.10	¿Cómo deshago una acción en TD Phone?	18
5	Configuración de TD Talk	19
5.1	Mi cuenta	20
5.1.1	¿Qué es una cuenta de myTobiiDynavox?	20
5.1.2	¿Cómo crear una cuenta myTobiiDynavox?	20
5.1.3	¿Cómo hago una copia de seguridad de mis datos personalizados?	20
5.1.4	¿Cómo restaurar mis datos personalizados?	21

5.2	Activación.....	21
5.2.1	Método de activación	22
5.2.1.1	¿Cómo elijo el método de activación en el TD Talk?	22
5.2.2	Botones	23
5.2.2.1	¿Cómo cambiar el tiempo de permanencia para la activación de botones en TD Talk?	23
5.2.2.2	¿Cómo configurar el tiempo de permanencia para la activación de botones en TD Talk?	23
5.2.3	Entrada alternativa de pulsador	24
5.2.3.1	¿Cómo elijo una entrada alternativa de pulsador para mi pulsador del TD Talk?	24
5.3	Teclado	25
5.3.1	Método de activación	25
5.3.1.1	¿Cómo elijo el método de activación para el teclado en el TD Talk?.....	25
5.3.2	Botones	26
5.3.2.1	¿Cómo cambiar el tiempo de permanencia para los botones del teclado en TD Talk?	26
5.3.2.2	¿Cómo configurar el tiempo de permanencia para la activación de botones en TD Talk?	26
5.3.3	Predicción	27
5.3.3.1	¿Cómo cambiar el tiempo de permanencia para los botones de predicción en TD Talk?	27
5.3.3.2	¿Cómo configurar el tiempo de permanencia para los botones de predicción en TD Talk?	28
5.3.4	General	28
5.3.4.1	¿Cómo agregar o descargar un nuevo idioma o un idioma de teclado en TD Talk?	28
5.3.4.2	¿Cómo seleccionar y activar los idiomas del teclado para usarlos o para que estén disponibles en TD Talk?.....	29
5.3.4.3	¿Cómo activo/desactivo la retroalimentación sobre el sonido del teclado en TD Talk?	29
5.4	Conversaciones	30
5.4.1	Temas	31
5.4.1.1	¿Cómo crear un nuevo tema en TD Talk?	31
5.4.1.2	¿Cómo cambiar el nombre de un tema en TD Talk?	31
5.4.1.3	¿Cómo hacer que el tema sea privado en TD Talk?.....	32
5.4.1.4	¿Cómo seleccionar que los temas activos en TD Talk?	32
5.4.1.5	¿Cómo eliminar un tema en TD Talk?	33
5.4.1.6	¿Cómo editar los mensajes rápidos en TD Talk?	33
5.4.1.7	¿Cómo agregar un mensaje rápido en TD Talk?	34
5.4.1.8	¿Cómo eliminar un mensaje rápido en TD Talk?.....	35
5.4.2	Expansiones de abreviaciones	36
5.4.2.1	¿Cómo agrego una expansión de abreviaciones en TD Talk?	36
5.4.2.2	¿Cómo edito una expansión de abreviaciones en TD Talk?.....	37
5.4.2.3	¿Cómo eliminar una expansión de abreviaciones en TD Talk?.....	37
5.5	Voz	38
5.5.1	Voces	39
5.5.1.1	Voces instaladas y descargables	39
5.5.1.1.1	¿Cómo descargar una nueva voz en TD Talk?.....	39
5.5.1.1.2	¿Cómo seleccionar mi voz en TD Talk?	40
5.5.1.1.3	¿Cómo puedo aplicar un filtro a las voces disponibles en el TD Talk?	40
5.5.1.2	Configuración de voces.....	41
5.5.1.2.1	¿Cómo modificar mi voz en TD Talk?	41

	5.5.1.3	Pronunciación.....	42
	5.5.1.3.1	¿Cómo puedo crear excepciones de pronunciación en TD Talk?.....	42
5.5.2		Cuentas de bancos de voz.....	43
	5.5.2.1	Cuentas de bancos de voz.....	43
	5.5.2.1.1	¿Cómo utilizar mi voz desde mi servicio de banco de voz?.....	43
5.6		Dispositivo	45
	5.6.1	Ventana del interlocutor	45
	5.6.1.1	¿Cómo activar/desactivar la Ventana del interlocutor en TD Talk?.....	45
	5.6.1.2	¿Cómo configurar las opciones de visualización para la Ventana del interlocutor en TD Talk?	46
5.7		General	46
	5.7.1	Idioma de la aplicación.....	46
	5.7.1.1	¿Cómo configurar el idioma de la aplicación en TD Talk?.....	46
	5.7.2	Tamaño del texto	47
	5.7.2.1	¿Cómo modifico el tamaño del texto en TD Talk??	47
	5.7.3	Comentarios.....	47
	5.7.3.1	¿Cómo envío comentarios a Tobii Dynavox en TD Talk?.....	47
	5.7.4	Términos de servicio y aviso de privacidad	48
	5.7.4.1	Cómo abrir los Términos de servicio.....	48
	5.7.4.2	Cómo abrir el aviso de privacidad	49
	5.7.5	Recopilar registros	49
	5.7.5.1	¿Cómo puedo recopilar registros para TD Talk?	49

1 Bienvenido

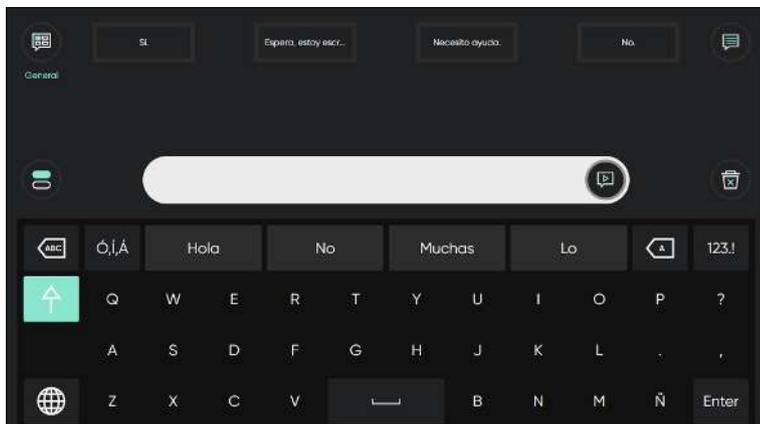


Ilustración 1: TD Talk

TD Talk permite a las personas expresar quiénes son y lo que quieren decir de la forma más fluida posible. Está diseñado para que la construcción de oraciones sea lo más rápida posible. TD Talk permite a las personas que lo utilizan participar activamente de las conversaciones. TD Talk tiene un aspecto familiar para que puedan comenzar a utilizarlo en el menor tiempo posible. Al aprender los patrones de oraciones y el uso de palabras únicas de una persona, TD Talk se adapta continuamente para ofrecer opciones de comunicación personalmente relevantes.

1.1 Requisitos del sistema

Tabla 1: iOS

	Sistema operativo	Dispositivo	Memoria	Táctil	Cámara
Mínimo	iOS 15.1	iPad 7. ^a generación	4 GB	Táctil integrado	Cámara integrada
Recomendado	iOS 15.1	iPad 8. ^a generación	4 GB	Táctil integrado	Cámara integrada

1.2 Idiomas admitidos

- Danés (Dinamarca)
- Holandés (Holanda)
- Inglés (EE. UU.)
- Francés (Francia)
- Alemán (Alemania)
- Italiano (Italia)
- Noruego (Noruega)
- Español (América Latina)
- Sueco (Suecia)
- Próximamente, más idiomas.

1.3 Cómo obtener TD Suite

TD Talk está disponible a través de TobiiDynavox.com para dispositivos con Windows y a través de la App Store de Apple para iPadOS.

2 Recursos y soporte

Tobii Dynavox ofrece diversos recursos gratuitos para apoyar y complementar su experiencia con TD Talk. ¡No se pierda estas herramientas que le ayudarán a aprovechar al máximo su software Tobii Dynavox!

2.1 Recursos y soporte en línea

Si necesita soporte, visite la sección de Capacitaciones y soporte del sitio web de Tobii Dynavox.

2.2 Centro de aprendizaje



El Centro de aprendizaje está actualmente solo en inglés.

Visite learn.tobiidynavox.com para obtener documentación, entrenamiento y otros recursos, incluidos:

- Respuestas a preguntas frecuentes
- Videos de entrenamiento
- Seminarios web grabados
- Cursos en línea

3 Para comenzar

Si se va a utilizar TD Talk junto con un Seguidor ocular, asegúrese de tener una calibración activa para el Seguidor ocular.

- iOS: use la aplicación TD CoPilot para configurar el Seguidor ocular.
Para obtener más información, consulte el Manual del usuario de TD Pilot.

3.1 Descripción general de TD Talk

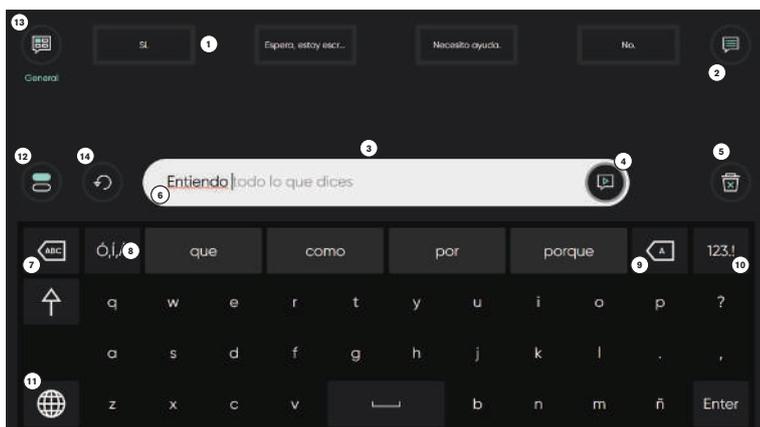


Ilustración 2: TD Talk

Posición	Descripción	Posición	Descripción
1	Mensajes rápidos Mensajes escritos previamente que se pronuncian inmediatamente cuando se seleccionan	8	Predicción de palabras/expansiones de abreviaciones Predice automáticamente las palabras a partir de lo que ha escrito hasta el momento. Cuando se utiliza Expansiones de abreviaciones, la primera palabra se sustituye por la expansión.
2	Más mensajes rápidos Accede a todos los mensajes rápidos para el tema actual.	9	Retroceso Borra el carácter que está a la izquierda del cursor.
3	Ventana de mensajes Aquí puede ver y editar el texto que le gustaría decir.	10	Página de números Accede a los números y caracteres especiales.
4	Hablar Pronuncia el mensaje que está en la ventana de mensajes. También puede pausar el habla y reanudarla.	11	Cambiar idioma Cambie entre los idiomas que usted habla.
5	Borrar Borra todo el texto que hay en la ventana de mensajes.	12	Charla Cambia a una segunda ventana de mensaje para escribir un nuevo mensaje sin perder el texto de la primera ventana de mensaje.
6	Predicción de frases TD Talk memoriza lo que usted escribe y usa esa información para predecir frases. La predicción se basa en la frecuencia y hace que la comunicación sea más rápida y más personal.	13	Temas Organiza sus mensajes rápidos por tema. Cambia a un tema para acceder a esos mensajes.

Posición	Descripción	Posición	Descripción
7	Borrar palabra Borra la palabra que está a la izquierda del cursor.	14	Deshacer Deshace las acciones en la ventana de mensajes.

3.2 El Menú oculto



Ilustración 3: Menú oculto de TD Talk

Posición	Descripción	Posición	Descripción
14	AssistiveTouch Encendido de AssistiveTouch. Use AssistiveTouch para acceder a la pantalla de inicio y al resto de sus aplicaciones.	16	Pausar/Reanudar Interacción con la mirada Botón de alternancia para pausar temporalmente y reanudar la interacción con la mirada.
15	Más Accede al Cuadro de mandos y a la Configuración.	17	Modo transparente Hace que la interfaz de TD Talk sea traslúcida y enciende la cámara trasera. Este modo puede usarse para ver lo que hay frente a su dispositivo, como su compañero de comunicación, mientras usa TD Talk.

3.2.1 ¿Cómo acceder al Menú oculto en TD Talk?

Hay dos maneras de acceder al Menú oculto en TD Talk:

- **Como usuario:** Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.
- **Como cuidador:** Deslice el dedo hacia arriba desde la letra **T** en el teclado de TD Talk.

3.3 Cuadro de mandos

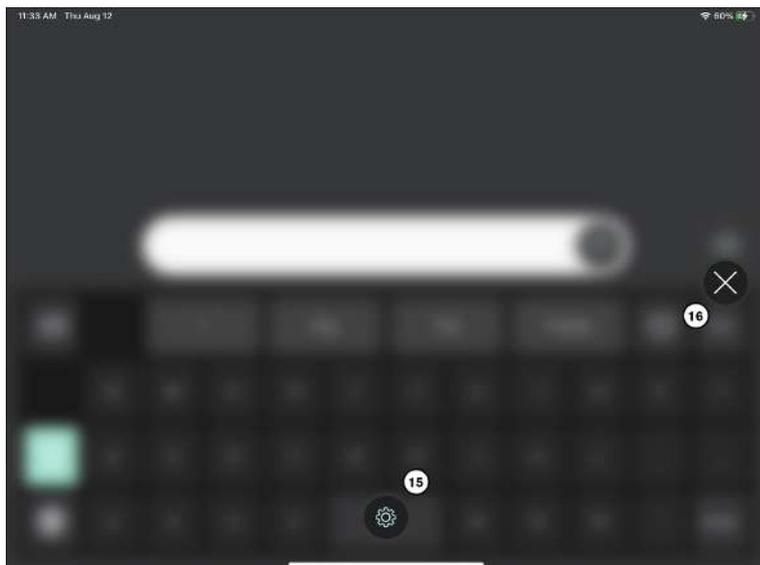


Ilustración 4: Cuadro de mandos de TD Talk

Posición	Descripción	Posición	Descripción
15	Configuración de TD Talk Para obtener más información, consulte la 5 <i>Configuración de TD Talk</i> , página 19.	16	Salir del Cuadro de mandos Seleccione el botón para salir del Cuadro de mandos.

3.3.1 ¿Cómo acceder al Cuadro de mandos en TD Talk?

- Acceda a la configuración de una de las siguientes maneras:
 - **Como usuario:** Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.
 - **Como cuidador:** Deslice el dedo hacia arriba desde la letra T en el teclado de TD Talk.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

- Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.

3.3.2 ¿Cómo salir de TD Talk y cerrarlo?

- Acceda a la configuración de una de las siguientes maneras:
 - **Como usuario:** Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.
 - **Como cuidador:** Deslice el dedo hacia arriba desde la letra T en el teclado de TD Talk.

El botón  (AssistiveTouch) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

- Seleccione el botón  (AssistiveTouch) para abrir el menú de AssistiveTouch.
- Seleccione el botón  (Inicio) desde el menú de AssistiveTouch.

3.4 Configuración de TD Talk

1. Seleccione la aplicación  de TD Talk en la pantalla de inicio del dispositivo iPadOS.
2. Acceda a la configuración de una de las siguientes maneras:
 - **Como usuario:** Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.
 - **Como cuidador:** Deslice el dedo hacia arriba desde la letra T en el teclado de TD Talk.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

3. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.
4. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
5. Configure el idioma de la aplicación de TD Talk:

- Seleccione el botón  (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
- Busque el ícono  (General) para encontrar el apartado de configuración correcto.
- Seleccione el botón de **Abrir**.
- Busque en la sección de **Idioma de la aplicación**.
- Seleccione el botón de opción junto al idioma en el que desea que esté la aplicación.

- Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.
6. Seleccione la voz o las voces que se van a utilizar:

- Busque el ícono  (Voz) para encontrar el apartado de configuración correcto.
- Seleccione el botón de **Abrir**.
- Mire en la sección **Sus voces**.
- Seleccione el botón de opción debajo del idioma instalado que desea hablar.

 Si falta el idioma deseado, consulte 5.3.4.1 *¿Cómo agregar o descargar un nuevo idioma o un idioma de teclado en TD Talk?, página 28* y 5.3.4.2 *¿Cómo seleccionar y activar los idiomas del teclado para usarlos o para que estén disponibles en TD Talk?, página 29*.

- Seleccione el botón de opción junto a la voz que se va a utilizar en la lista de voces disponibles para el idioma que se va a hablar.

Utilice los botones de “Desplazar hacia arriba” y “Desplazar hacia abajo” ubicados a la derecha para desplazarse por la lista de voces disponibles para el idioma.

 Para probar una voz, seleccione  junto a la voz. (si se encuentra disponible).

-  Si en lugar de un botón de opción está uno de  (descargar), selecciónelo para descargar la voz.
- Repita los dos últimos pasos si desea poder hablar en más de un idioma.

7. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.



En TD Talk, puede cambiar rápidamente entre los idiomas seleccionados al seleccionar el botón  en la esquina inferior izquierda del teclado.

4 Uso de TD Talk

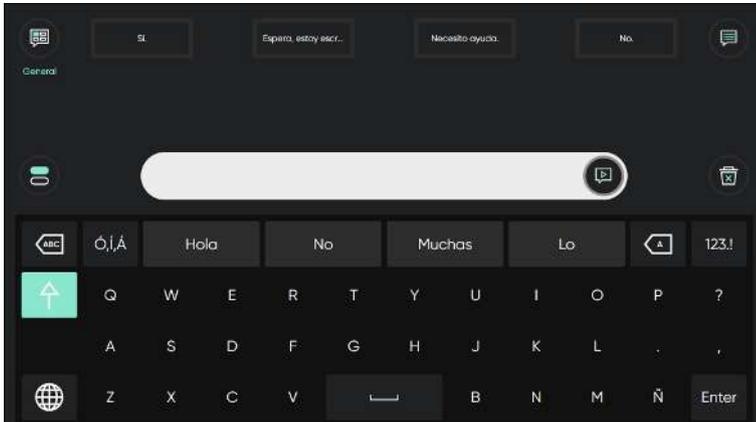


Ilustración 5: TD Talk

4.1 Uso del teclado

Al seleccionar letras en el teclado, se formulan (o construyen) palabras y oraciones en la ventana de mensajes.


Selecione el botón  (Hablar) cuando esté listo para hablar.

4.2 Uso de predicciones

TD Talk ofrece predicción de palabras y predicción de frases, lo que puede disminuir el esfuerzo o aumentar la velocidad en la producción de mensajes.

4.2.1 Predicciones de palabras

El motor de predicción de palabras que se utiliza en TD Talk es de SwiftKey™ y se utiliza habitualmente en tablets y smartphones. SwiftKey™ utiliza una combinación de tecnologías de inteligencia artificial para predecir la palabra que el usuario escribirá a continuación. SwiftKey™ memoriza textos anteriores que el usuario ha escrito y ofrece predicciones o presenta predicciones realizadas basadas en el texto actualmente introducido y lo que ha memorizado. El idioma de Predicción de palabras cambiará en función del ajuste de idioma del teclado.

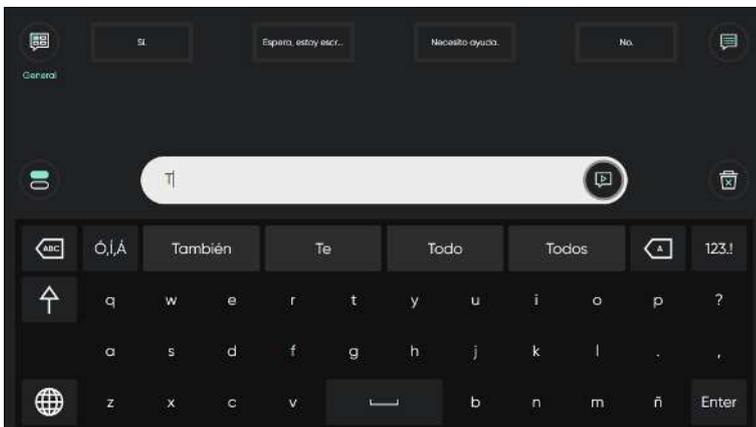


Quando la función de predicción de palabras esté en uso, aparecerán cuatro (4) cuadros sobre el teclado. El cuadro que se encuentra más a la izquierda mostrará la sugerencia más probable y los tres (3) cuadros restantes contendrán una palabra sugerida. Para seleccionar una palabra sugerida, tiene que seleccionar el cuadro que contiene la palabra. Si no encuentra la palabra que busca, continúe escribiendo y es probable que esta aparezca después del siguiente carácter.

Si está utilizando la predicción de palabras y desea escribir una palabra que contenga un acento, como “café”, ahorrará tiempo y esfuerzo si deja que la predicción de palabras se encargue de introducir el acento. Escriba “cafe” y recibirá la sugerencia “café”.

4.2.2 Predicción de frases

TD Talk memoriza y analiza su manera de hablar a lo largo del tiempo. La predicción de palabras memoriza las palabras que usted dice. La predicción de frases memoriza su manera de juntar esas palabras para formar un conjunto de frases personal. Cuando empiece a escribir, las frases predichas a partir de su conjunto de frases se ofrecerán en la ventana de mensajes en texto gris.

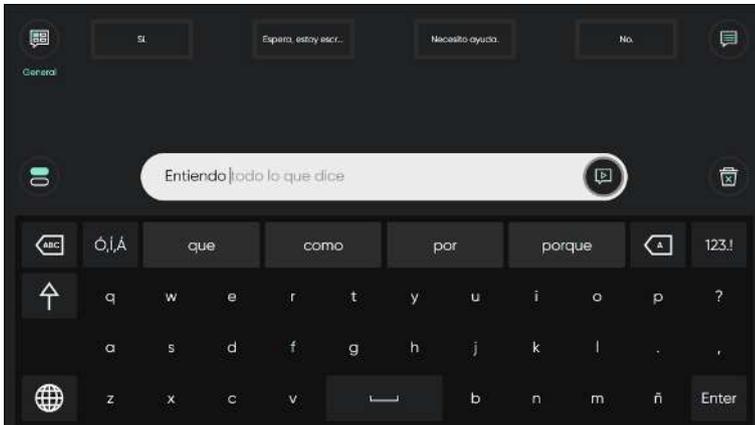

Mire y fije la mirada en la última palabra de la frase predicha para seleccionar la frase. El color en la frase cambiará de gris a negro para indicar que se ha seleccionado. Ahora puede pronunciarse o editarse.

4.3 Editar un mensaje

4.3.1 ¿Cómo editar un mensaje en TD Talk?

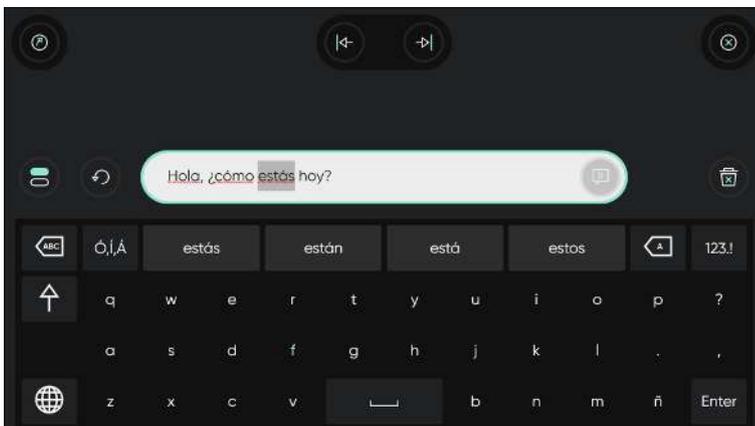


Ilustración 6: Menú de edición

1. Mire el texto en la ventana de mensajes para editarlo en la ventana de mensajes. Se abrirá el Menú de edición.
2. Cuando se selecciona una palabra, escriba para reemplazarla, seleccione una palabra de la predicción de palabras o seleccione eliminar.

Utilice las flechas  (mover a la izquierda) y  (mover a la derecha) si el cursor está en el lugar equivocado.

3. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir del Modo de edición.

4.4 Copiar y pegar

4.4.1 ¿Cómo uso la función Copiar en TD Talk?

 La función Copiar de TD Talk copia toda la ventana de mensajes.

1. Mire el texto en la ventana de mensajes para editarlo en la ventana de mensajes.
Se abrirá el Menú de edición.

Seleccione el botón  (Copiar)

4.4.2 ¿Cómo uso la función Pegar en TD Talk?

1. Mire la ventana de mensajes vacía.
Se abrirá el Menú de copiar.

Seleccione el botón  (Pegar).
El mensaje aparecerá en la ventana de mensajes.

 Puede pegar texto copiado de una fuente de texto en cualquier otro software de su dispositivo.

 En iOS, aparecerá una ventana emergente de Apple al pegar entre aplicaciones. Puede permitirlo siempre con el AssistiveTouch O cambiar las configuración de Apple para permitirlo siempre. TD Talk le preguntará si quiere ir a esa configuración.

4.5 Uso de mensajes rápidos

4.5.1 ¿Cómo utilizar los mensajes rápidos en TD Talk?

Hay dos (2) tipos de mensajes rápidos, los primeros son siempre visibles en la pantalla de inicio. Los segundos se


ubican debajo del botón  (Más mensajes rápidos).

Mensajes rápidos en la pantalla de inicio

1. Seleccione los **Mensajes rápidos** para hablar.
El mensaje seleccionado se pronunciará de inmediato sin añadirlo a la ventana de mensajes y no interferirá con ningún mensaje que tenga en proceso.

Más mensajes rápidos


1. Seleccione el botón  (Más mensajes rápidos).

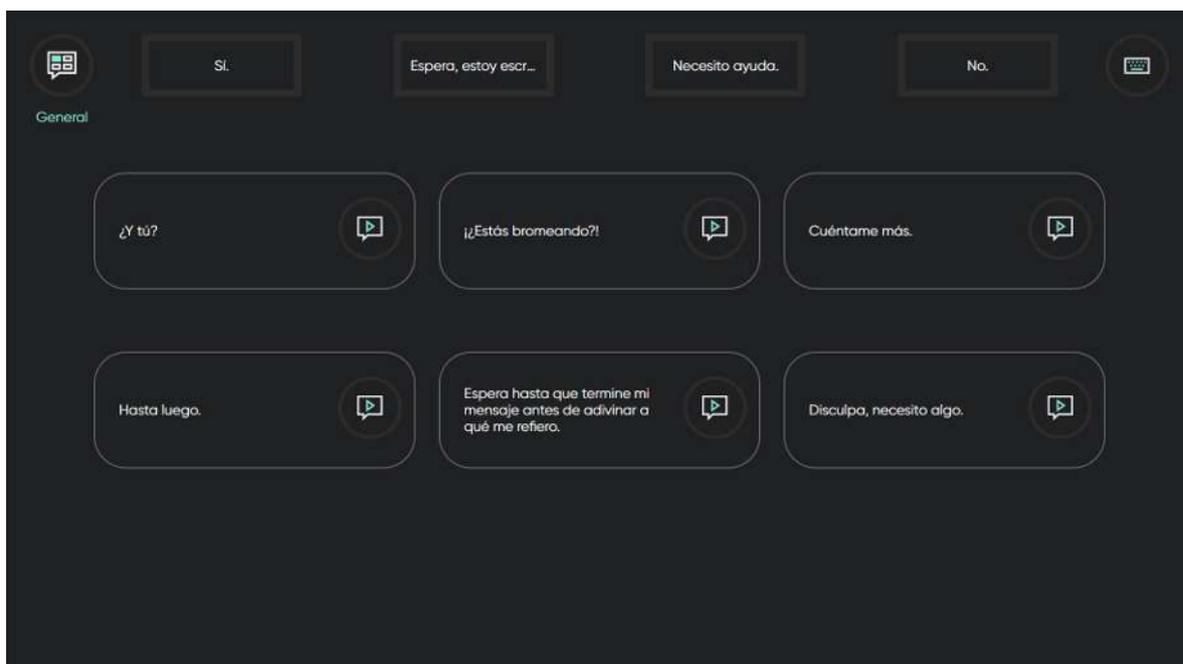

2. Seleccione el botón  (Hablar) junto al mensaje.
3. Seleccione el botón  (Teclado) para regresar a la pantalla de inicio.

4.5.2 ¿Cómo cambio el tema de los mensajes rápidos?

1. Seleccione el botón  (Menú Temas).
2. Seleccione el tema nuevo.

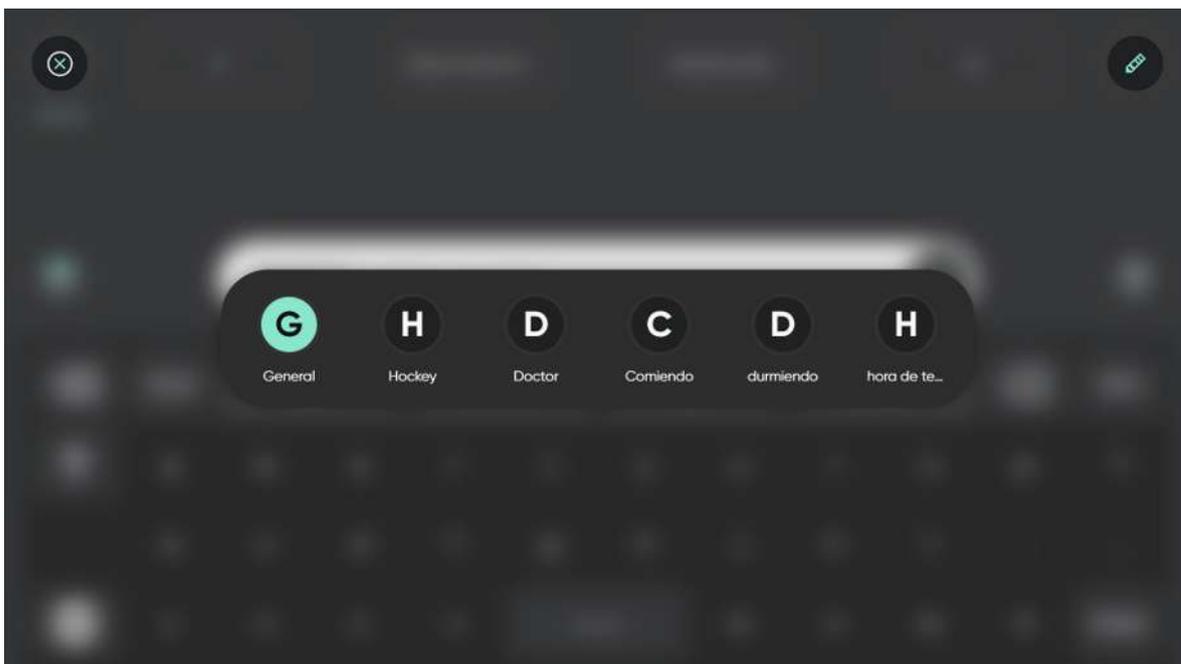

 Seleccione el botón  (Editar) para cambiar los temas mostrados/disponibles en el menú Temas. Para obtener más información, consulte [5.4.1 Temas, página 31](#).

4.6 Cambio de idioma

4.6.1 ¿Cómo cambiar los idiomas que deseo hablar en TD Talk?


1. Seleccione el botón  (Idioma) en el teclado.
2. Seleccione el idioma que desea hablar
Si falta el idioma deseado, consulte [5.3.4.1 ¿Cómo agregar o descargar un nuevo idioma o un idioma de teclado en TD Talk?, página 28](#)
3. Seleccione el botón  (Atrás) para volver.

4.7 Charla

Seleccione el ícono  (Chat) para cambiar a una segunda ventana de mensaje para escribir un nuevo mensaje sin perder el texto de la primera ventana de mensaje.

Seleccione el ícono  (Volver al Chat) para volver a cambiar a la primera ventana de mensaje.

4.8 Modo transparente

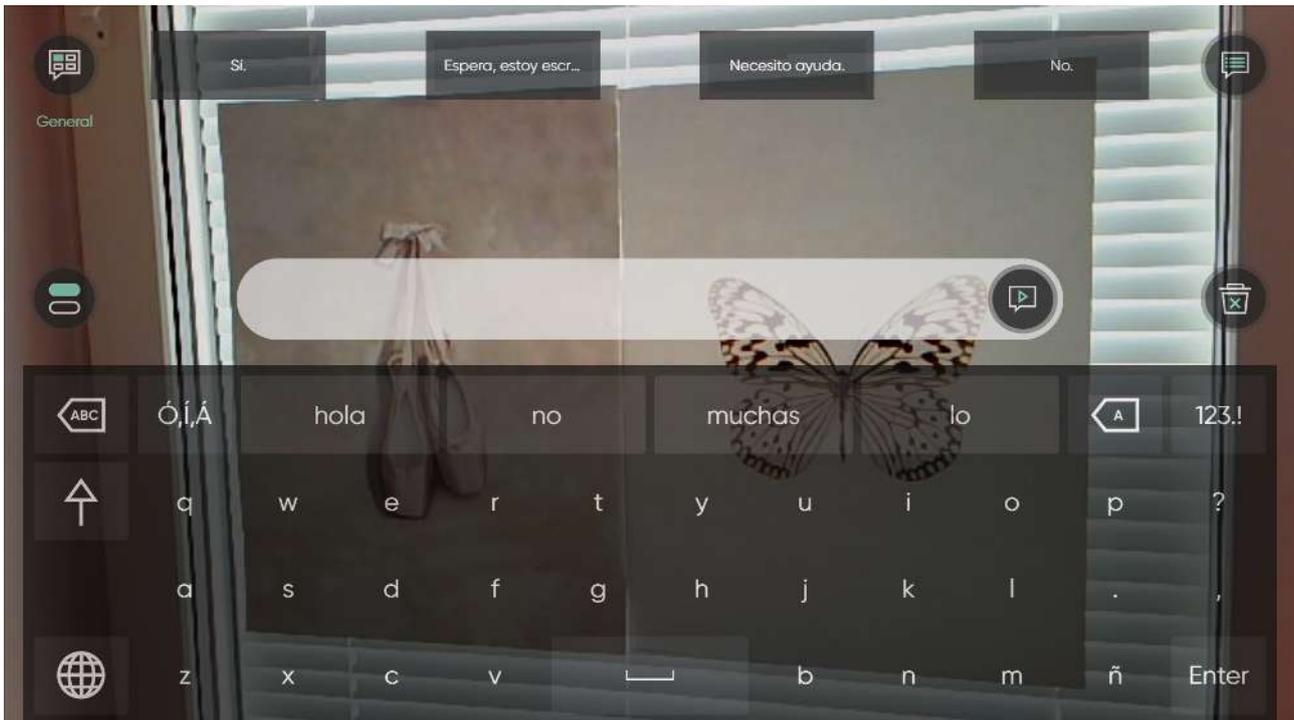

Hace que la interfaz de TD Talk sea traslúcida y enciende la cámara trasera. Este modo puede usarse para ver lo que hay frente a su dispositivo, como su compañero de comunicación, mientras usa TD Talk.

4.8.1 Cómo empiezo a ver el Modo transparente

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular. El Off-Screen Menu aparecerá en la parte inferior central de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Modo transparente).


4.8.2 ¿Cómo finalizo el Modo transparente?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor ocular o en el área del seguidor ocular. El Off-Screen Menu aparecerá en la parte inferior central de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Finalizar Modo transparente).

4.9 ¿Cómo utilizar Expansiones de abreviaciones en TD Talk?

Al escribir una abreviación existente, la primera posición en las predicciones de palabras cambiará a la expansión de abreviaciones.

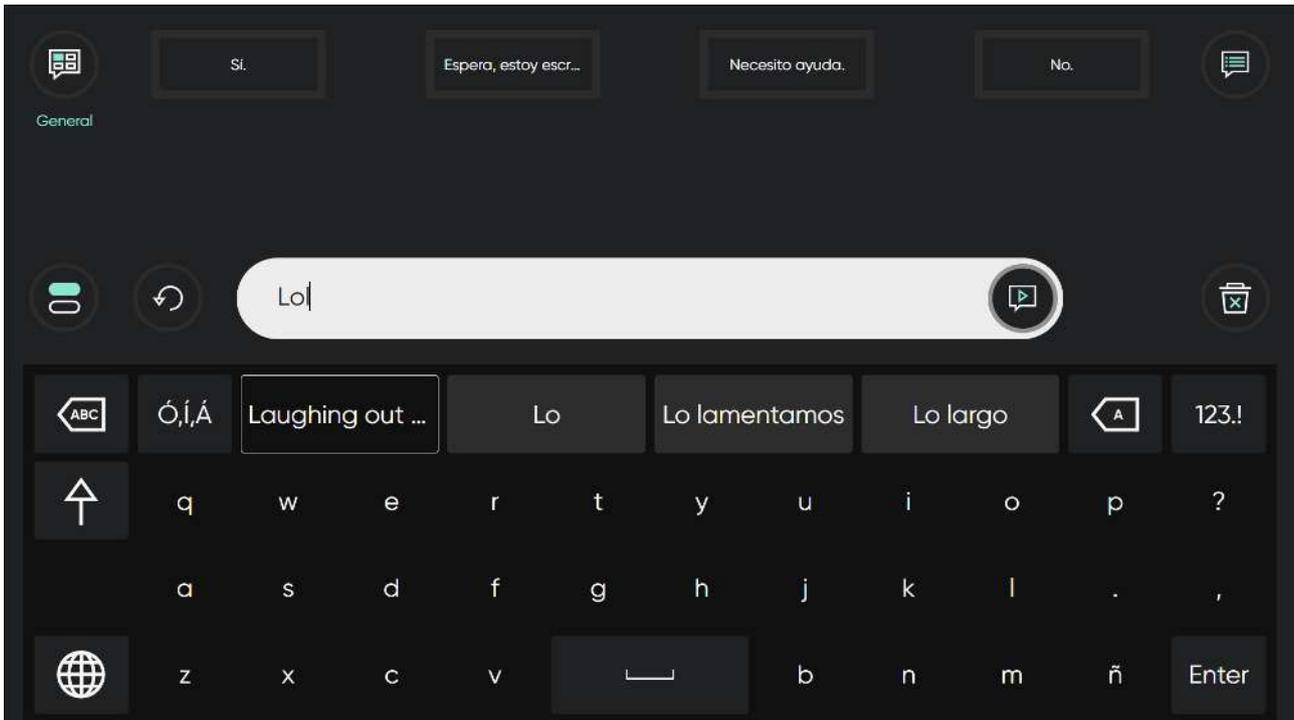


Seleccione la expansión de abreviaciones en el área de predicción de palabras para expandir la abreviación en la ventana de mensajes.

Para obtener más información sobre cómo añadir, editar y borrar expansiones de abreviaciones, consulte Expansiones de abreviaciones.

4.10 ¿Cómo deshago una acción en TD Phone?

Seleccione el botón  (Deshacer) situado junto a la ventana de mensajes para deshacer una a una las acciones realizadas en la ventana de mensajes desde que empezó a escribir en la ventana de mensajes activa.

5 Configuración de TD Talk

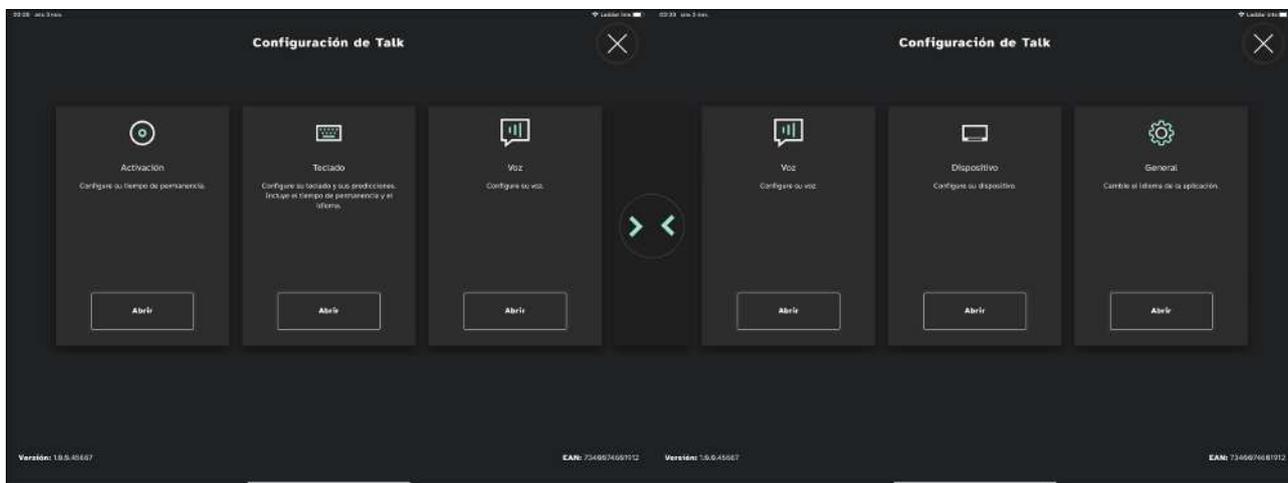

Íconos	Acción	Descripción
	Activación	Solo está disponible si está instalado y activado un Seguidor ocular. Abre la configuración de Activación . Para obtener más información, consulte <i>5.2 Activación, página 21</i> .
	Teclado	Abre la configuración del Teclado . Para obtener más información, consulte <i>5.3 Teclado, página 25</i> .
	Voz	Abre la configuración de Voz . Para obtener más información, consulte <i>5.5 Voz, página 38</i> .
	Dispositivo	Abre la configuración de Dispositivo . Para obtener más información, consulte <i>5.6 Dispositivo, página 45</i> .
	General	Abre la configuración General . Para obtener más información, consulte <i>5.7 General, página 46</i> .

5.1

Mi cuenta



Inicie sesión en su myTobiiDynavox Account para hacer una copia de seguridad de y restaurar sus predicciones de palabras personales, sus pronunciaciones, sus predicciones de frases, sus temas y sus mensajes rápidos entre sus dispositivos.

5.1.1 ¿Qué es una cuenta de myTobiiDynavox?

Un myTobiiDynavox Account es una plataforma en línea ofrecida por Tobii Dynavox, una compañía especializada en la tecnología de asistencia para personas con dificultades de comunicación y movilidad. El myTobiiDynavox Account permite a los usuarios acceder a varios recursos, incluyendo las copias de seguridad y la restauración personalizadas de datos, las actualizaciones de software, los materiales de apoyo, los foros de usuarios y los cursos de capacitación en línea. Además, sirve como centro para administrar la configuración de dispositivos, crear y compartir tableros de comunicación, y acceder a funciones adicionales ajustadas a las necesidades de personas que usan dispositivos de Tobii Dynavox. En general, es una plataforma central para que los usuarios administren sus soluciones de tecnología de asistencia y encuentren apoyo dentro de la comunidad de Tobii Dynavox.

5.1.2 ¿Cómo crear una cuenta myTobiiDynavox?

Visite [Create a myTobiiDynavox account](#) para crear una cuenta de myTobiiDynavox.

5.1.3 ¿Cómo hago una copia de seguridad de mis datos personalizados?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.



4. Busque el ícono  (Iniciar sesión) en la esquina superior izquierda de la pantalla.
5. Use el teclado para ingresar su nombre de usuario en el campo **Nombre de usuario**.
6. Use el teclado para ingresar su contraseña en el campo **Contraseña**.
7. Seleccione el botón **Iniciar sesión**.
8. Seleccione el botón **Realizar copia de seguridad**.
La fecha en que se realiza la copia de seguridad y desde la cual se mostrará el dispositivo a la izquierda del botón Realizar copia de seguridad cuando una copia de seguridad está lista.



9. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir.

5.1.4 ¿Cómo restaurar mis datos personalizados?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.



El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.



3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.



4. Busque el ícono  (Iniciar sesión) en la esquina superior izquierda de la pantalla.
5. Use el teclado para ingresar su nombre de usuario en el campo **Nombre de usuario**.
6. Use el teclado para ingresar su contraseña en el campo **Contraseña**.
7. Seleccione el botón **Iniciar sesión**.
8. Seleccione el botón **Restaurar**.
La fecha en que se realiza la restauración se mostrará a la izquierda del botón Restaurar cuando una restauración haya finalizado.




9. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir.

5.2 Activación



Solo está disponible si está instalado y activado un Seguidor ocular.

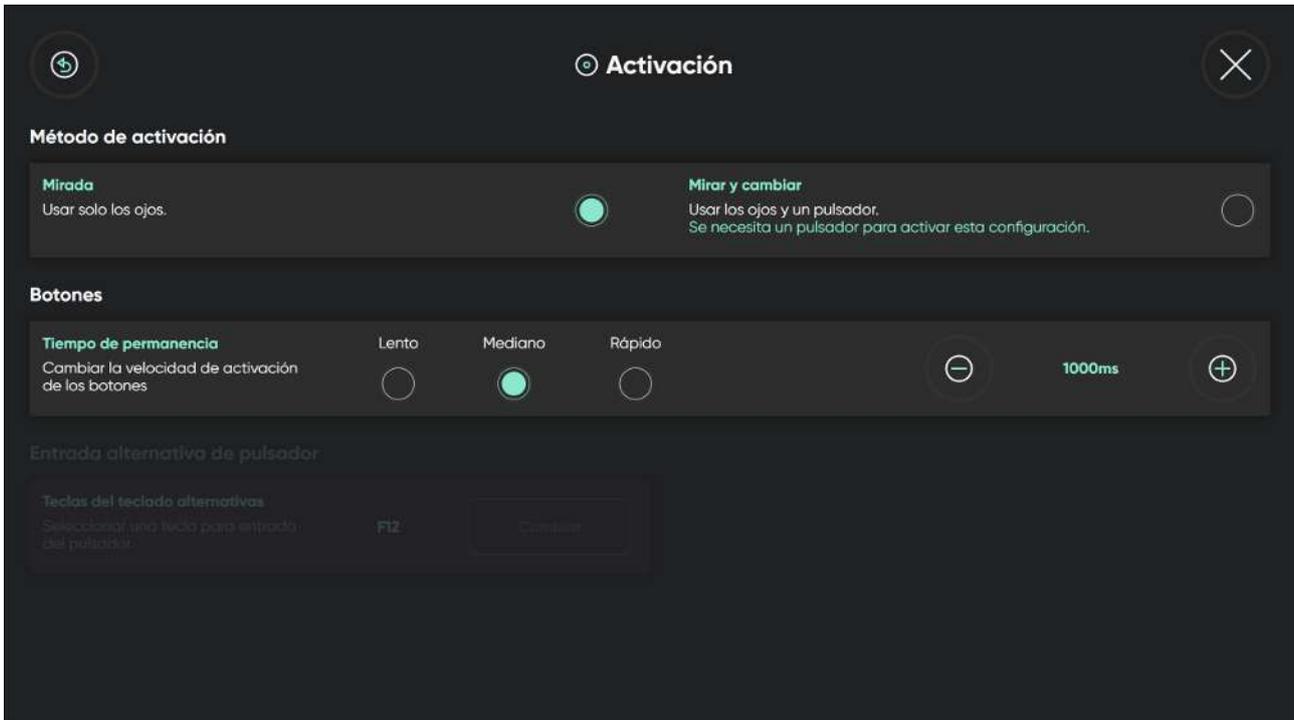

5.2.1 Método de activación

5.2.1.1 ¿Cómo elijo el método de activación en el TD Talk?



La selección de Método de activación para la activación no se refiere a la activación de las teclas del teclado, sino a todas las demás activaciones en TD Talk.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón  (Cuadro de mandos) para abrirlo.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono  (Activación) para encontrar el apartado de configuración correcto.

5. Seleccione el botón de **Abrir**.

6. Mire en la sección **Método de activación**.

7. Marque el botón circular para seleccionar el **método de activación** que desea usar para los siguientes valores:
 - **Gaze**- Usar solo los ojos (predeterminado)
 - Mirar y cambiar: Usar los ojos y un pulsador



Se necesita un pulsador para activar esta configuración.

8. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

9. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.2.2 Botones

5.2.2.1 ¿Cómo cambiar el tiempo de permanencia para la activación de botones en TD Talk?

 Los botones no se refieren a los del teclado, sino a los ubicados en todos los demás lugares en TD Talk.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte inferior media de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono  (Activación) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.

5. Seleccione el botón de **Abrir**.

6. Mire en la sección de **botones**.

7. Seleccione el botón de opción para el **Tiempo de permanencia** para uno de los siguientes valores:
 - Lento
 - **Medio** (predeterminado)
 - Rápido

8. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

9. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.2.2.2 ¿Cómo configurar el tiempo de permanencia para la activación de botones en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte inferior media de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono  (Activación) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.

5. Seleccione el botón de **Abrir**.

6. Mire en la sección de **botones**.

7. Seleccione uno de los siguientes botones para configurar el **tiempo de permanencia**:

–  — para disminuir el tiempo de permanencia

–  — para aumentar el tiempo de permanencia

El valor puede variar entre 200 ms e infinito.

8. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

9. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.2.3 Entrada alternativa de pulsador

Some switches requires that a keyboard key is set for switch input.



Si se establece una entrada alternativa de pulsador, esa tecla del teclado también actuará como pulsador si se selecciona en cualquier teclado externo conectado.

5.2.3.1 ¿Cómo elijo una entrada alternativa de pulsador para mi pulsador del TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón  (Cuadro de mandos) para abrirlo.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono  (Activación) para encontrar el apartado de configuración correcto.

5. Seleccione el botón de **Abrir**.

6. Busque la sección **Entrada alternativa de pulsador**.

7. Seleccione el botón de **Cambiar**.



8. Elija el botón de radio del teclado que usará como **Entrada alternativa de pulsador**.

9. Seleccione el botón **Aceptar** para confirmar o el botón **Cancelar** para anular.

10. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

11. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.3 Teclado

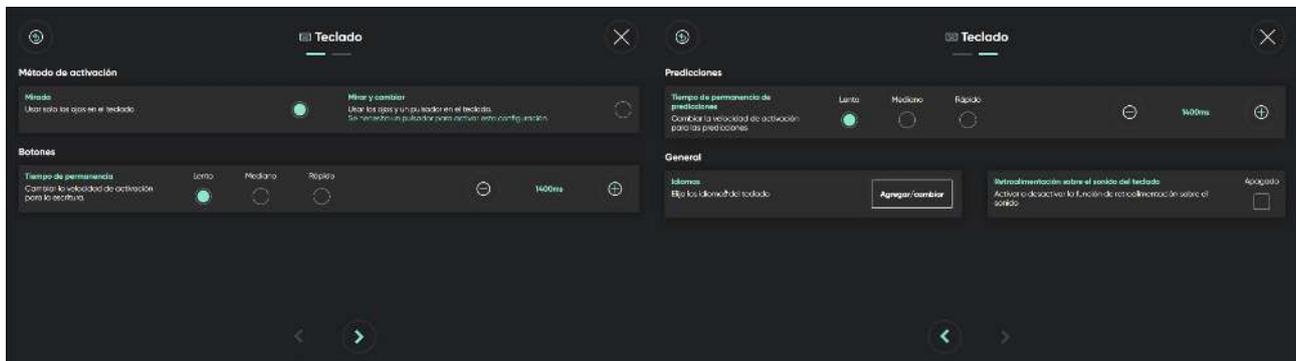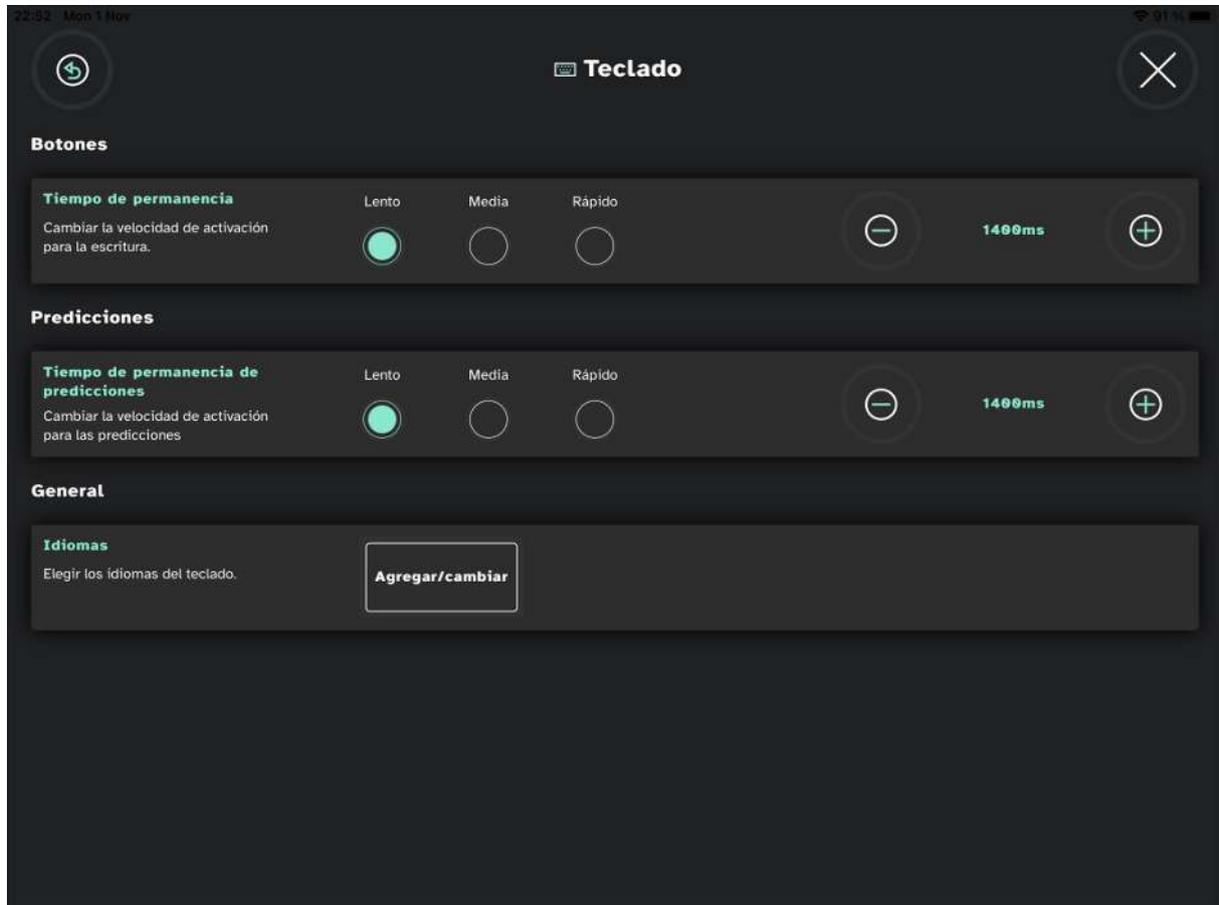

5.3.1 Método de activación

5.3.1.1 ¿Cómo elijo el método de activación para el teclado en el TD Talk?



La selección de Método de activación para el teclado se refiere únicamente a la activación de los botones del teclado en TD Talk.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón  (Cuadro de mandos) para abrirlo.
3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
4. Busque el ícono  (Teclado) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Mire en la sección **Método de activación**.
7. Marque el botón circular para seleccionar el **método de activación** que desea usar para los siguientes valores:
 - **Gaze**- Usar solo los ojos (predeterminado)
 - Mirar y cambiar: Usar los ojos y un pulsador

 Se necesita un pulsador para activar esta configuración.

8. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.
9. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.3.2 Botones

5.3.2.1 ¿Cómo cambiar el tiempo de permanencia para los botones del teclado en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte inferior media de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.
3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
4. Busque el ícono  (Teclado) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Mire en la sección de **botones**.
7. Seleccione el botón de opción para el **Tiempo de permanencia** para uno de los siguientes valores:
 - Lento
 - **Medio** (predeterminado)
 - Rápido

8. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.
9. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.3.2.2 ¿Cómo configurar el tiempo de permanencia para la activación de botones en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte inferior media de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.
3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
4. Busque el ícono  (Teclado) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Mire en la sección de **botones**.
7. Seleccione uno de los siguientes botones de opción para configurar el **tiempo de permanencia**:

–  — para disminuir el tiempo de permanencia

–  — para aumentar el tiempo de permanencia

El valor puede variar entre 200 ms e infinito.

8. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.
9. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.3.3 Predicción

5.3.3.1 ¿Cómo cambiar el tiempo de permanencia para los botones de predicción en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón  (Cuadro de mandos) para abrirlo.
3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
4. Busque el ícono  (Teclado) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Seleccione el botón  (Página siguiente) ubicado en la parte inferior de la pantalla.
7. Mire en la sección **Predicción**.
8. Seleccione el botón de opción para el **Tiempo de permanencia** para uno de los siguientes valores:
 - Lento
 - **Medium** (predeterminado)
 - Rápido

9. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.
10. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.3.3.2 ¿Cómo configurar el tiempo de permanencia para los botones de predicción en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón  (Cuadro de mandos) para abrirlo.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono  (Teclado) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.

6. Seleccione el botón  (Página siguiente) ubicado en la parte inferior de la pantalla.

7. Mire en la sección **Predicción**.

8. Seleccione uno de los siguientes botones de opción para configurar el **tiempo de permanencia**:

–  — para disminuir el tiempo de permanencia

–  — para aumentar el tiempo de permanencia

El valor puede variar entre 200 ms e infinito.

9. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

10. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.3.4 General

5.3.4.1 ¿Cómo agregar o descargar un nuevo idioma o un idioma de teclado en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón  (Cuadro de mandos) para abrirlo.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono  (Teclado) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.

6. Seleccione el botón  (Página siguiente) ubicado en la parte inferior de la pantalla.

7. Mire en la sección **General**.

8. Seleccione el botón **Agregar/cambiar en** “Elegir idioma del teclado”.

9. Seleccione la pestaña **Descargar**.

10. Seleccione el botón  (Descargar) junto al idioma para empezar a descargar el nuevo teclado.

11. Seleccione el botón **Descargar** para empezar a descargar o el botón **Cancelar** para cancelar la descarga.
12. Seleccione la pestaña **Instalado**.
13. Seleccione el botón de opción junto a los idiomas para activar el idioma.

14. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

15. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.3.4.2 ¿Cómo seleccionar y activar los idiomas del teclado para usarlos o para que estén disponibles en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón  (Cuadro de mandos) para abrirlo.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono  (Teclado) para encontrar el apartado de configuración correcto.

5. Seleccione el botón de **Abrir**.

6. Seleccione el botón  (Página siguiente) ubicado en la parte inferior de la pantalla.

7. Seleccione el botón **Agregar/cambiar en** "Elegir idioma del teclado".

8. Seleccione la pestaña **Instalado**.

9. Seleccione el botón de opción junto a los idiomas para activar el idioma del teclado para ese idioma.

 Asegúrese de seleccionar el botón de opción para todos los idiomas para los que desea que haya una voz disponible.

10. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

11. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.3.4.3 ¿Cómo activo/desactivo la retroalimentación sobre el sonido del teclado en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón  (Cuadro de mandos) para abrirlo.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono  (Teclado) para encontrar el apartado de configuración correcto.

5. Seleccione el botón de **Abrir**.

6. Seleccione el botón  (Página siguiente) ubicado en la parte inferior de la pantalla.


7. Mire en la sección **General**.

8. Alterne el botón de **Encendido/apagado** de "**Retroalimentación sobre el sonido del teclado**" entre:
- Encendido
 - Apagado


9. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

10. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.4 Conversaciones

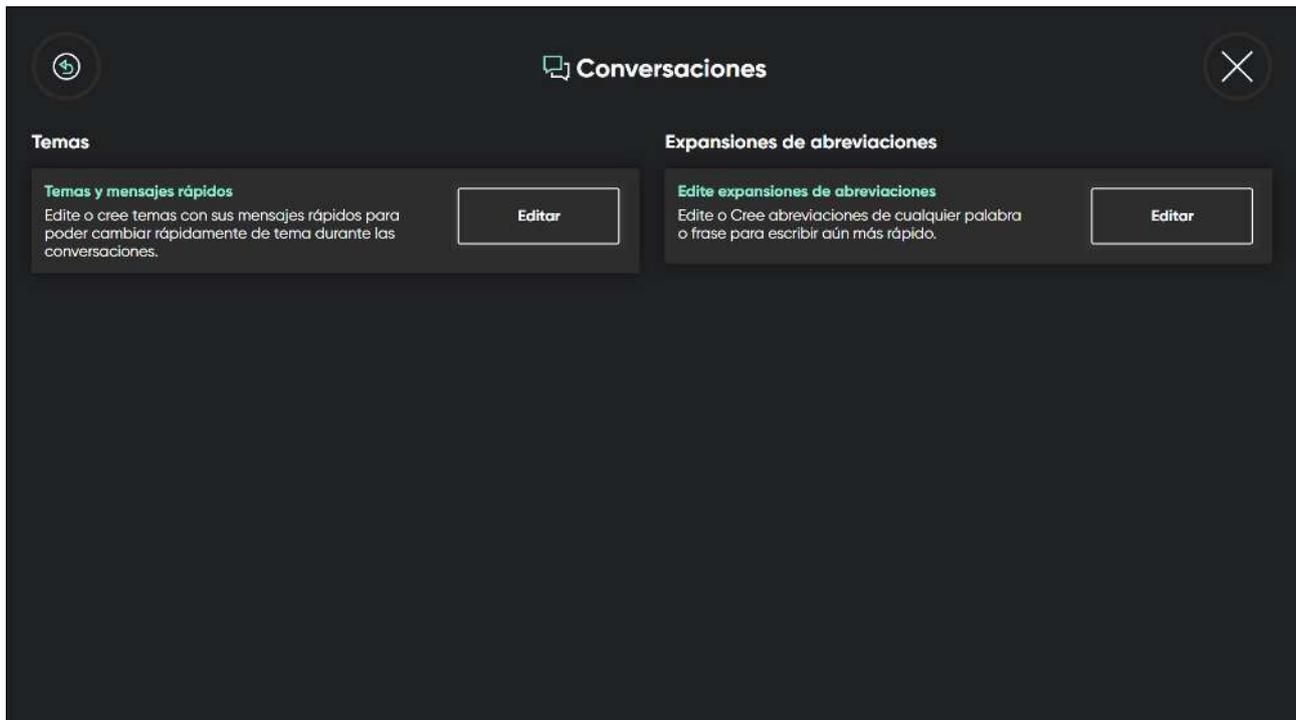

5.4.1 Temas

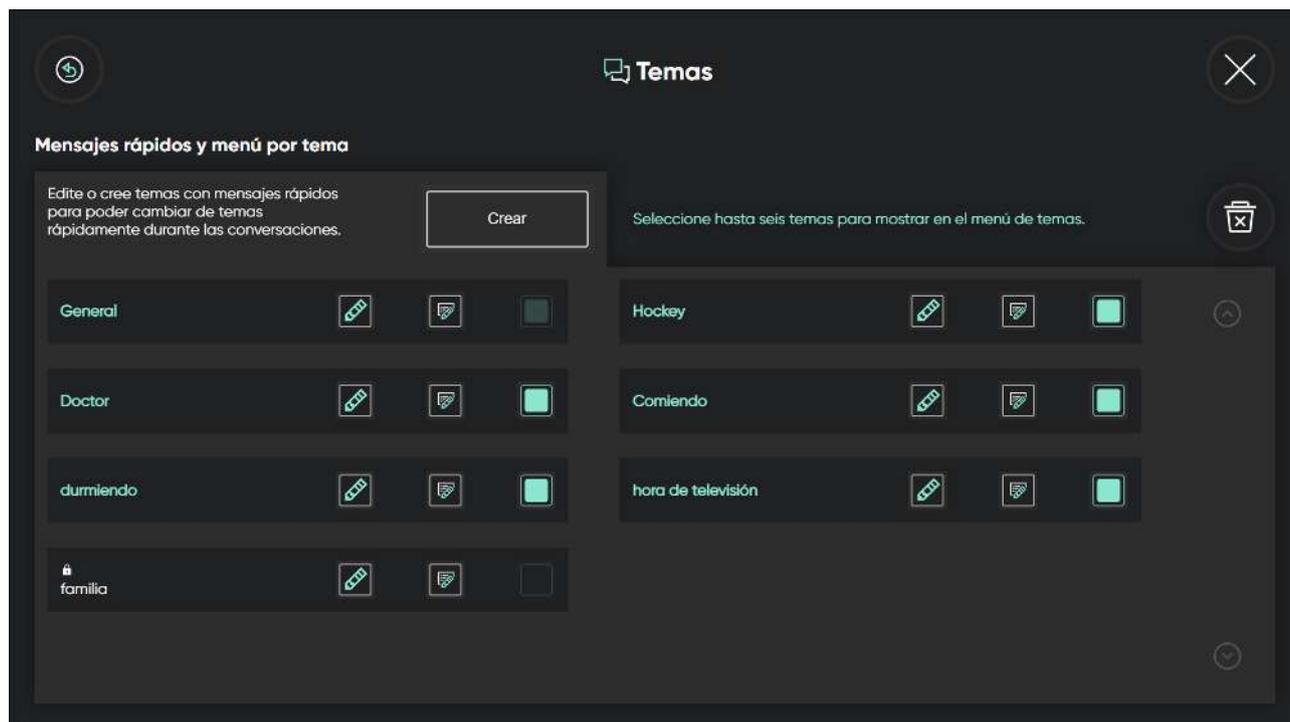

5.4.1.1 ¿Cómo crear un nuevo tema en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono  (Activación) para encontrar el apartado de configuración correcto.

5. Seleccione el botón de **Abrir**.

6. Seleccione el botón **Crear**.

7. Use el teclado para nombrar el nuevo tema.

 Seleccione la casilla de verificación **Modo de privacidad** para desactivar la predicción de frases y el aprendizaje.

8. Seleccione el ícono  (Guardar) para guardar.

9. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir.

5.4.1.2 ¿Cómo cambiar el nombre de un tema en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono  (Activación) para encontrar el apartado de configuración correcto.

5. Seleccione el botón de **Abrir**.

6. Seleccione el botón  (Editar) junto al nombre del tema.

7. Use el teclado para cambiar el nombre del tema.

 Seleccione la casilla de verificación **Modo de privacidad** para desactivar la predicción de frases y el aprendizaje.

8. Seleccione el ícono  (Guardar) para guardar.

9. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir.

5.4.1.3 ¿Cómo hacer que el tema sea privado en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono  (Activación) para encontrar el apartado de configuración correcto.

5. Seleccione el botón de **Abrir**.

6. Seleccione el botón  (Editar) junto al nombre del tema.

7. Seleccione la casilla de verificación **Modo de privacidad** para desactivar la predicción de frases y el aprendizaje.

8. Seleccione el ícono  (Guardar) para guardar.

9. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir.

5.4.1.4 ¿Cómo seleccionar que los temas activos en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.
3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
4. Busque el icono  (Conversaciones) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Seleccione el botón **Editar** para Temas y mensajes rápidos en la sección Temas.
7. Seleccione la **Casilla de verificación** para el tema que estará activo.

 Puede seleccionar hasta seis (6) temas, que estarán disponibles en el menú de temas.

8. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la vista de edición.
9. Seleccione el botón  (Teclado) para regresar a la pantalla de inicio.

5.4.1.5 ¿Cómo eliminar un tema en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.
3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
4. Busque el icono  (Conversaciones) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Seleccione el botón **Editar** para Temas y mensajes rápidos en la sección Temas.
7. Seleccione el botón  (Borrar).
8. Seleccione el botón  (Borrar) que se encuentra junto al tema que desea borrar.
9. Seleccione el botón **Borrar** para eliminar el tema o el botón **Cancelar** para anularlo.
10. Seleccione el botón  (Listo) cuando haya terminado de eliminarlo.
11. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la vista de edición.
12. Seleccione el botón  (Teclado) para regresar a la pantalla de inicio.

5.4.1.6 ¿Cómo editar los mensajes rápidos en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.
3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
4. Busque el ícono  (Conversaciones) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Seleccione el botón **Editar** para Temas y mensajes rápidos en la sección Temas.
7. Seleccione el botón  (Editar mensajes rápidos).
8. Seleccione el botón  (Editar) junto al mensaje que va a editar.
9. Haga los cambios al mensaje con el teclado.
10. Seleccione el botón  (Guardar) para guardar los cambios hechos en el mensaje rápido.
11. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la vista de edición.
12. Seleccione el botón  (Teclado) para regresar a la pantalla de inicio.

5.4.1.7 ¿Cómo agregar un mensaje rápido en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.
3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
4. Busque el ícono  (Conversaciones) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Seleccione el botón **Editar** para Temas y mensajes rápidos en la sección Temas.
7. Seleccione el botón  (Editar mensajes rápidos).
8. Seleccione el botón  (Agregar) junto a la ubicación de Agregar nuevo. Puede tener hasta tres (3) páginas de mensajes rápidos por cada tema.
9. Use los botones  y  para navegar entre las páginas.
Escriba el nuevo mensaje con el teclado.
10. Seleccione el botón  (Guardar) para guardar el nuevo mensaje rápido.
11. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la vista de edición.

12. Seleccione el botón  (Teclado) para regresar a la pantalla de inicio.

5.4.1.8 ¿Cómo eliminar un mensaje rápido en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono  (Conversaciones) para encontrar el apartado de configuración correcto.

5. Seleccione el botón de **Abrir**.

6. Seleccione el botón **Editar** para Temas y mensajes rápidos en la sección Temas.

7. Seleccione el botón  (Editar mensajes rápidos).

8. Seleccione el botón  (Editar) junto al mensaje que va a eliminar.


9. Seleccione el botón  Borrar mensaje.

10. Seleccione el botón  (Guardar) para guardar los cambios hechos en el mensaje rápido.

11. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la vista de edición.

12. Seleccione el botón  (Teclado) para regresar a la pantalla de inicio.

5.4.2 Expansiones de abreviaciones

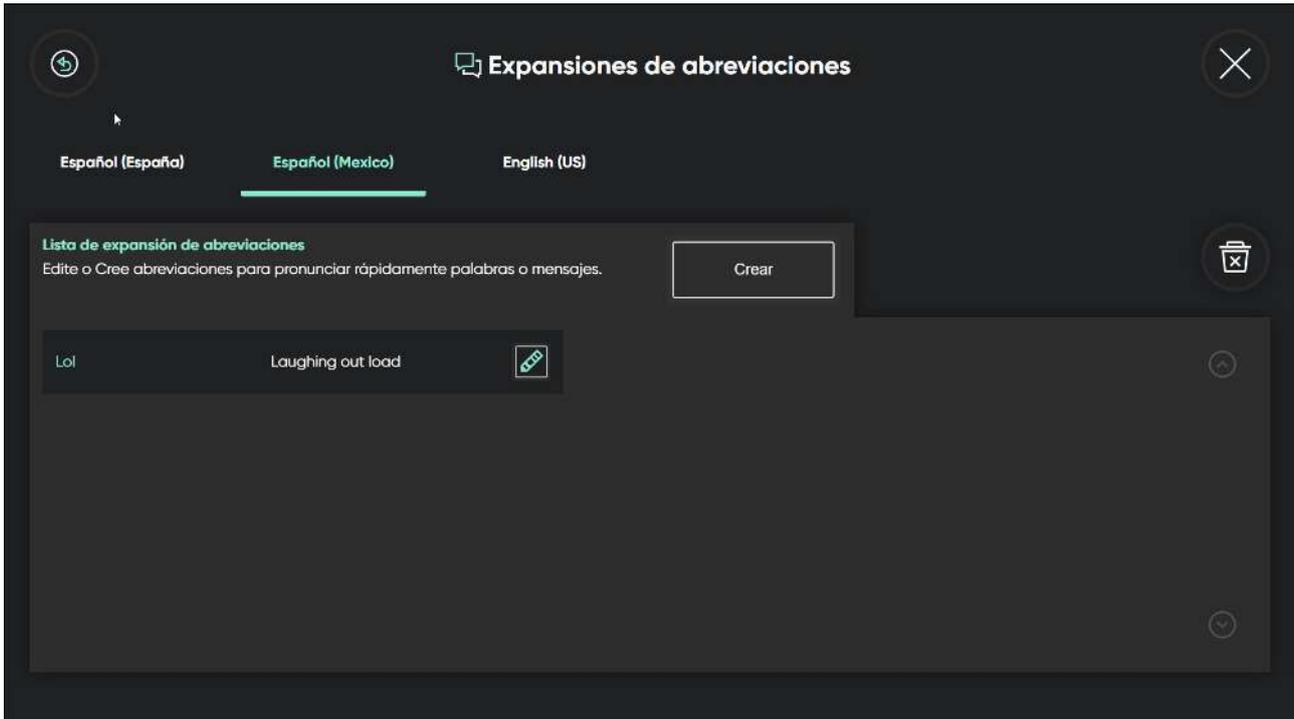

5.4.2.1 ¿Cómo agrego una expansión de abreviaciones en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.
3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
4. Busque el ícono  (Conversaciones) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Seleccione el botón **Editar** en el área Editar expansiones de abreviaciones en Expansiones de abreviaciones.
7. Seleccione la pestaña **idioma** debajo del idioma instalado para el que desea agregar una expansión de abreviaciones.
8. Seleccione el botón **Crear**.
9. Escriba en el cuadro de texto **Abreviación** la abreviación que desea crear.
10. Seleccione el ícono  situado junto al cuadro de texto **Palabra o mensaje**.
11. Escriba en el cuadro de texto **Palabra o mensaje** la palabra o el mensaje para el que ha creado la abreviación.
12. Seleccione el botón  (Guardar) para guardar los cambios hechos en la expansión de abreviaciones.
13. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la configuración de Conversaciones.

14. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.
15. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.4.2.2 ¿Cómo edito una expansión de abreviaciones en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.
3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
4. Busque el ícono  (Conversaciones) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Seleccione el botón **Editar** en el área Editar expansiones de abreviaciones en Expansiones de abreviaciones.
7. Seleccione la pestaña **idioma** debajo del idioma instalado para el que desea editar una expansión de abreviaciones.
8. Seleccione el ícono  situado junto a la abreviación que desee editar.
9. Edite en el cuadro de texto **Abreviación** la nueva abreviación que desea crear.
10. Seleccione el ícono  situado junto al cuadro de texto **Palabra o mensaje**.
11. Edite en el cuadro de texto **Palabra o mensaje** la nueva palabra o el mensaje para el que ha creado la abreviación.
12. Seleccione el botón  (Guardar) para guardar los cambios hechos en la expansión de abreviaciones.
13. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la configuración de Conversaciones.
14. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.
15. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.4.2.3 ¿Cómo eliminar una expansión de abreviaciones en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.
3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
4. Busque el ícono  (Conversaciones) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.

6. Seleccione el botón **Editar** en el área Editar expansiones de abreviaciones en Expansiones de abreviaciones.
7. Seleccione la pestaña **idioma** debajo del idioma instalado para el que desea borrar una expansión de abreviaciones.

8. Seleccione el botón  (Borrar).

9. Seleccione el botón  (Borrar) situado junto a la abreviación que desea borrar.

10. Seleccione el botón **Borrar** para confirmar, o el botón **Cancelar** para cancelar, y así borrar la abreviación.

11. Seleccione el botón  (Listo) cuando haya terminado de eliminarlo.


12. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la configuración de Conversaciones.

13. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

14. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.5 Voz

Configure aquí la voz de los idiomas de su teclado

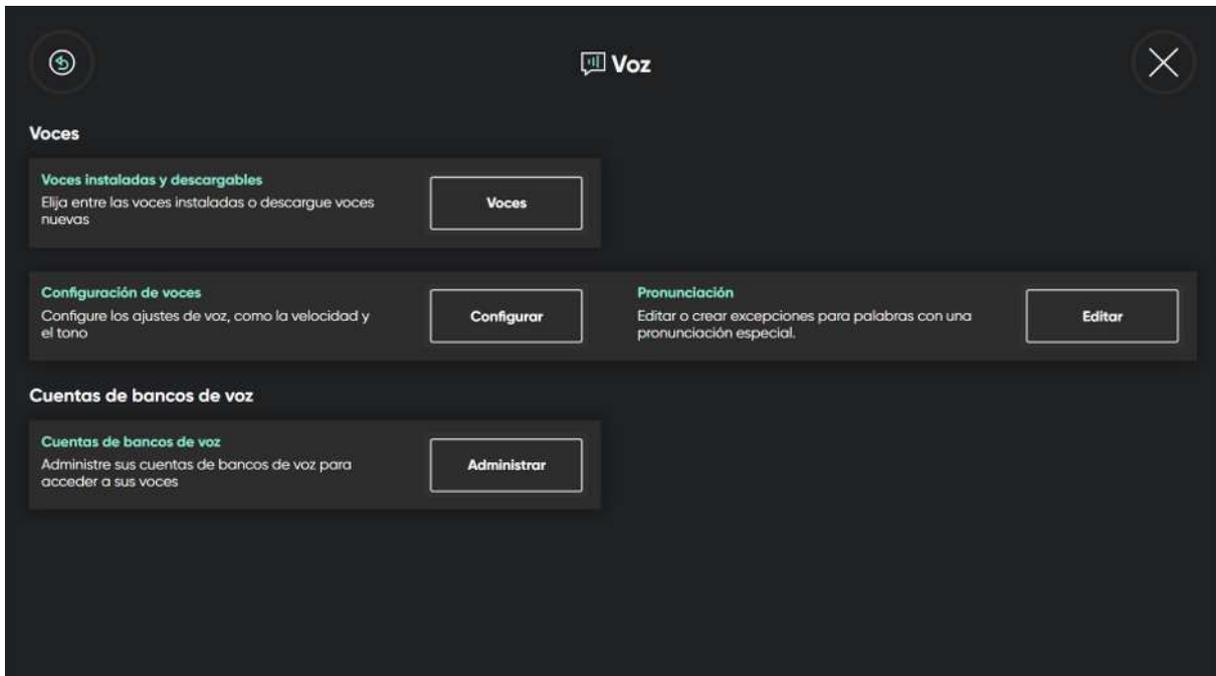

Todos los idiomas instalados se muestran en la parte superior de la pantalla. Cuando haya seleccionado el idioma, las voces disponibles para ese idioma se mostrarán en la lista debajo de los idiomas. Para probar una voz, seleccione



junto a la voz (si se encuentra disponible).

5.5.1 Voces

5.5.1.1 Voces instaladas y descargables

There are a lot of voices available within TD Talk, especially for some languages.

Filters can be applied to make it easier for the user to find their voice. For more information, see 5.5.1.1.3 *¿Cómo puedo aplicar un filtro a las voces disponibles en el TD Talk?, página 40*

5.5.1.1.1 ¿Cómo descargar una nueva voz en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.
3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
4. Busque el ícono  (Voz) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Busque en la sección **Voces**
7. Seleccione el botón **Voces** para Voces instaladas y descargables.
8. Seleccione la pestaña **Descargar**.
9. Seleccione la pestaña **idioma** debajo del idioma instalado que desea hablar.



Si falta el idioma deseado, consulte 5.3.4.1 *¿Cómo agregar o descargar un nuevo idioma o un idioma de teclado en TD Talk?, página 28* y 5.3.4.2 *¿Cómo seleccionar y activar los idiomas del teclado para usarlos o para que estén disponibles en TD Talk?, página 29*.

10. Seleccione el botón  (Descargar) junto a la voz para empezar a descargar la nueva voz.
Utilice los botones de “Desplazar hacia arriba” y “Desplazar hacia abajo” ubicados a la derecha para desplazarse por la lista de voces disponibles para el idioma.



Para probar una voz, seleccione  junto a la voz.

11. Seleccione el botón **Descargar** para empezar a descargar o el botón **Cancelar** para cancelar la descarga.
12. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de la voz.
13. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.
14. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.5.1.1.2 ¿Cómo seleccionar mi voz en TD Talk?

 Las voces del sistema de banco de voz tendrán el logotipo del servicio de banco de voz visible después del nombre de la voz.

- Acapela MyOwnVoice 
- ModelTalker  ModelTalker
- The Voice Keeper 

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono  (Voz) para encontrar el apartado de configuración correcto.

5. Seleccione el botón de **Abrir**.

6. Busque en la sección **Voces**

7. Seleccione el botón **Voces** para Voces instaladas y descargables.

8. Seleccione la pestaña **idioma** debajo del idioma instalado que desea hablar.

 Si falta el idioma deseado, consulte [5.3.4.1 ¿Cómo agregar o descargar un nuevo idioma o un idioma de teclado en TD Talk?](#), página 28 y [5.3.4.2 ¿Cómo seleccionar y activar los idiomas del teclado para usarlos o para que estén disponibles en TD Talk?](#), página 29.

9. Seleccione la voz que se va a utilizar en la lista de voces disponibles para el idioma que se va a hablar. Utilice los botones de “Desplazar hacia arriba” y “Desplazar hacia abajo” ubicados a la derecha para desplazarse por la lista de voces disponibles para el idioma.

 Para probar una voz, seleccione  junto a la voz.

10. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de la voz.

11. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

12. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.5.1.1.3 ¿Cómo puedo aplicar un filtro a las voces disponibles en el TD Talk?


On the **Installed** or **Download** tab, do the following:

1. Seleccione el  botón (Filtro).
2. Seleccione las casillas de verificación ubicadas al lado de las opciones que desea utilizar.

Puede elegir:

- Género: femenino, masculino
- Edad: niño, adolescente y adulto

5.5.1.2 Configuración de voces

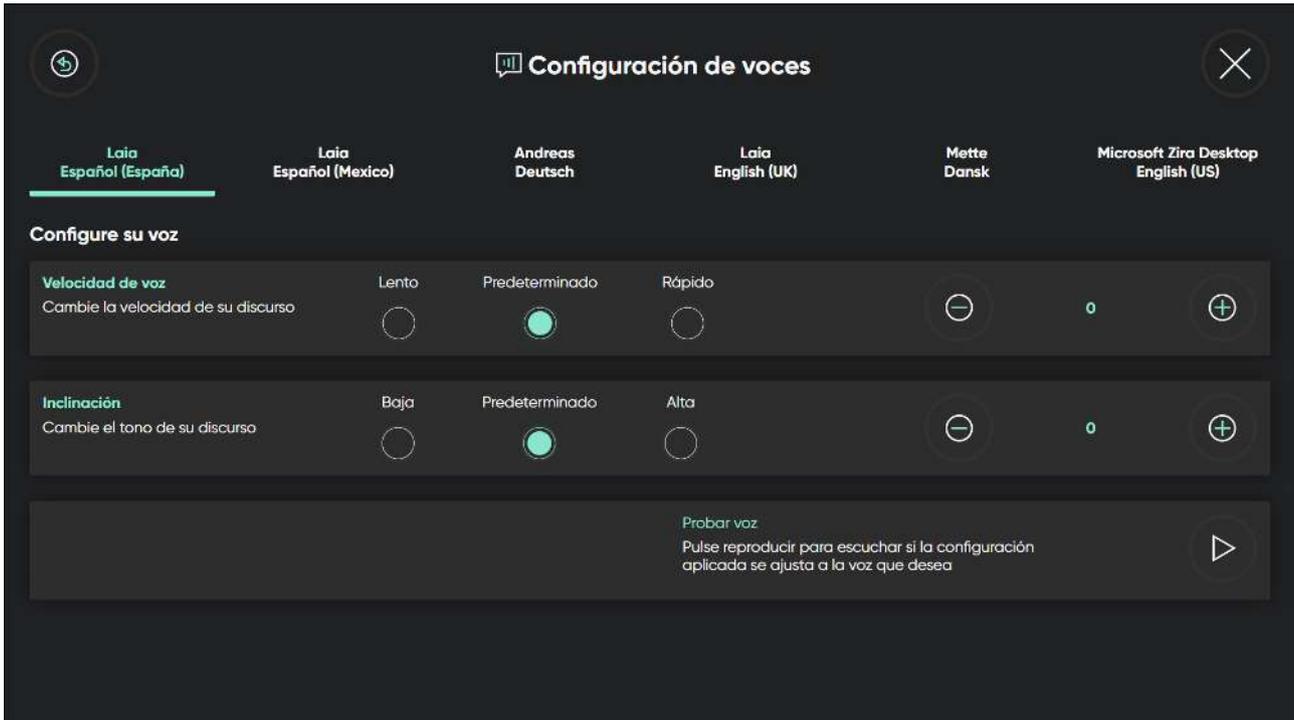

5.5.1.2.1 ¿Cómo modificar mi voz en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono  (Voz) para encontrar el apartado de configuración correcto.

5. Seleccione el botón de **Abrir**.

6. Busque en la sección **Voces**

7. Seleccione el botón **Configurar** para la Configuración de voz.

8. Seleccione la voz que desea cambiar de entre las voces disponibles.

9. Seleccione el botón de opción para la **Velocidad de voz** para uno de los siguientes valores:

- Lento
- **Predeterminado**
- Rápido

para cambiar la velocidad de su discurso.

10. Seleccione uno de los siguientes botones de opción para configurar la **Velocidad de voz**:

-  : para reducir la velocidad de voz

-  : para aumentar la velocidad de voz

El valor puede variar entre -10 y +10.

11. Seleccione el botón de opción del **Tono** para uno de los siguientes valores:

- Baja
- **Predeterminado**
- Alta

para cambiar el tono de su discurso.



Para escuchar la nueva voz, seleccione  en la sección Voz de prueba.

12. Seleccione uno de los siguientes botones para afinar el **Tono**:

-  : para bajar el tono

-  : para aumentar el tono

El valor puede variar entre -10 y +10.




Para escuchar la nueva voz, seleccione  en la sección Voz de prueba.

13. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de la voz.

14. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

15. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.5.1.3 Pronunciación

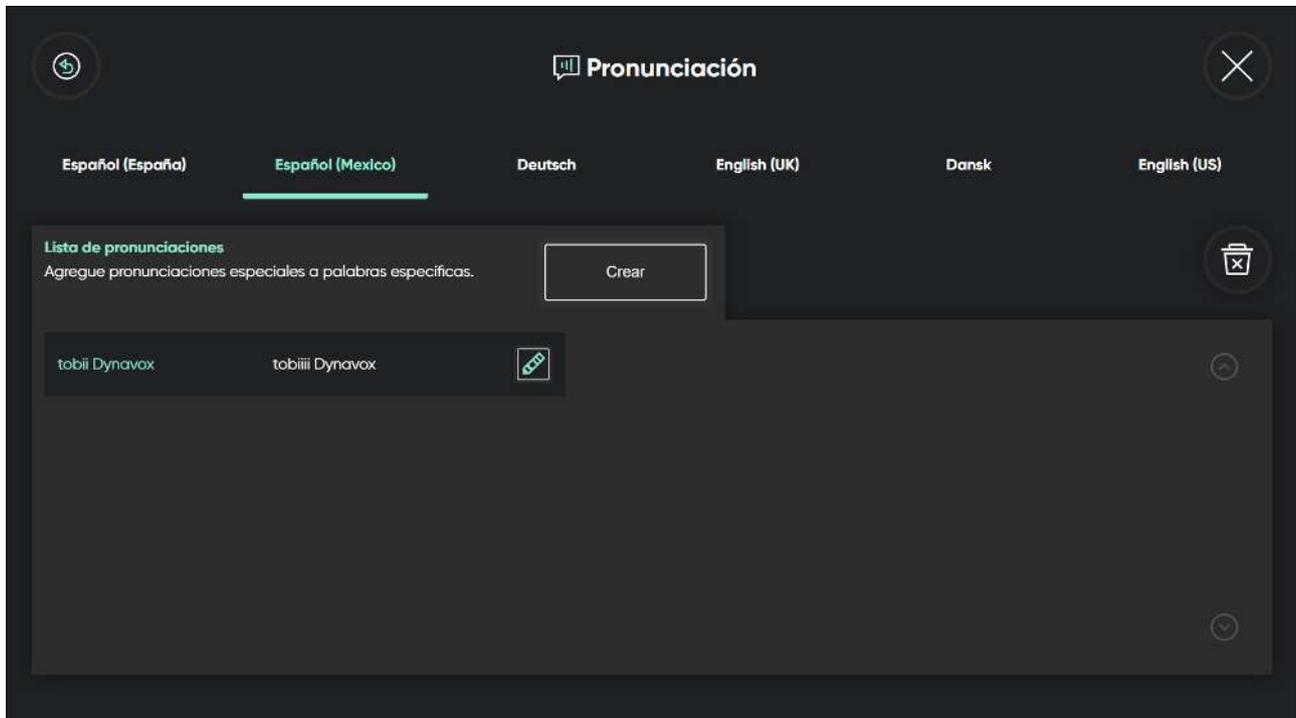

5.5.1.3.1 ¿Cómo puedo crear excepciones de pronunciación en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.
3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
4. Busque el ícono  (Voz) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Busque en la sección **Voces**
7. Seleccione el botón **Crear** para Pronunciaciones.
8. Seleccione la pestaña **idioma** debajo del idioma instalado para el que desea establecer una excepción de pronunciación.
9. Seleccione el botón **Crear**.
10. Escriba en el cuadro de texto **Palabra** la palabra para la que desea crear una excepción de pronunciación.
11. Seleccione el ícono  situado junto al cuadro de texto **Pronunciación**.
12. Escriba en el cuadro de texto **Pronunciación** cómo desea que se pronuncie la palabra.



Para escuchar la excepción de pronunciación, seleccione el ícono  situado junto al cuadro de texto **Pronunciación**.

13. Seleccione el botón **Crear** para guardar su excepción de Pronunciación.
14. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de la voz.
15. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.
16. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.5.2 Cuentas de bancos de voz

TD Talk puede conectarse a tres servicios diferentes de bancos de voz:

- Acapela MyOwnVoice 
- ModelTalker 
- The Voice Keeper 

El usuario necesitará una cuenta y las credenciales de inicio de sesión de uno de estos proveedores de servicios de bancos de voz para poder conectarse y utilizar la voz sintética personal.

5.5.2.1 Cuentas de bancos de voz

5.5.2.1.1 ¿Cómo utilizar mi voz desde mi servicio de banco de voz?




Se necesita acceso a Internet para iniciar sesión en el servicio de banco de voz.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.
3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
4. Busque el ícono  (Voz) para encontrar el apartado de configuración correcto.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.
6. Busque en la sección **Cuentas de bancos de voz**.
Seleccione el botón **Gestionar** para Cuentas de bancos de voz.
7. Seleccione el botón **Iniciar sesión** en la sección de su servicio de banco de voz.
8. Ingrese el **Nombre de usuario** y la **Contraseña**.
9. Seleccione el botón **Iniciar sesión**.

La voz personal se descargará y se seleccionará automáticamente como la voz predeterminada para el usuario.

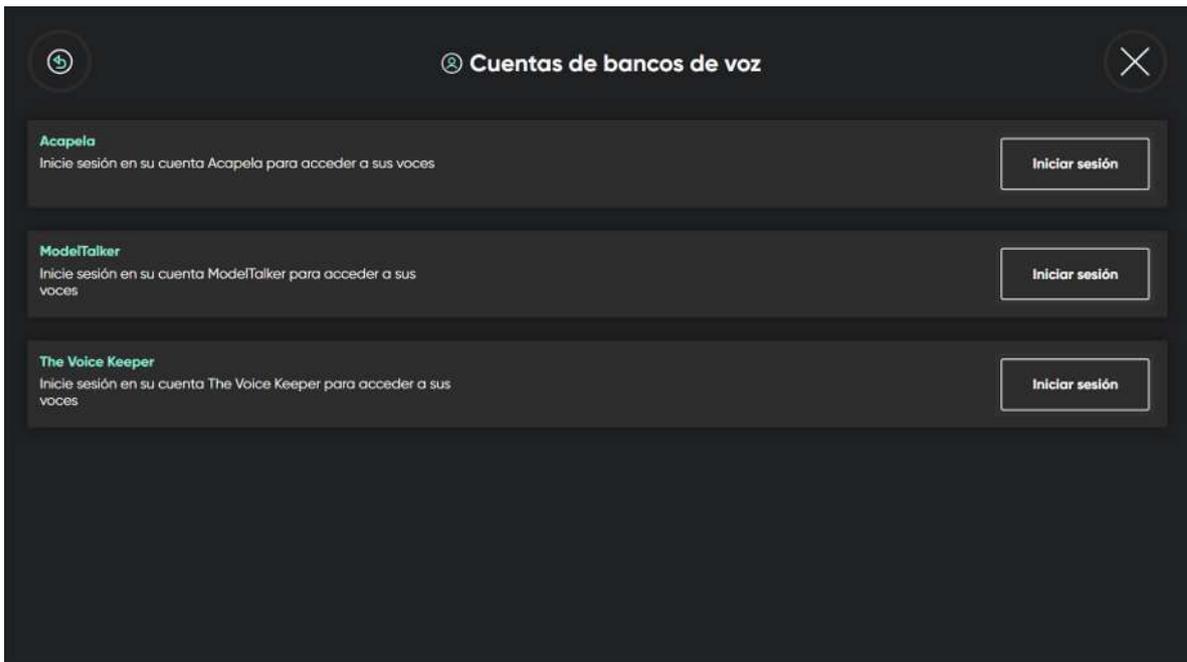


Este será el caso cuando estén disponibles voces sintéticas personales en varios idiomas.

10. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de la voz.
11. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.
12. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.6 Dispositivo

 Solo disponible en TD Pilot.

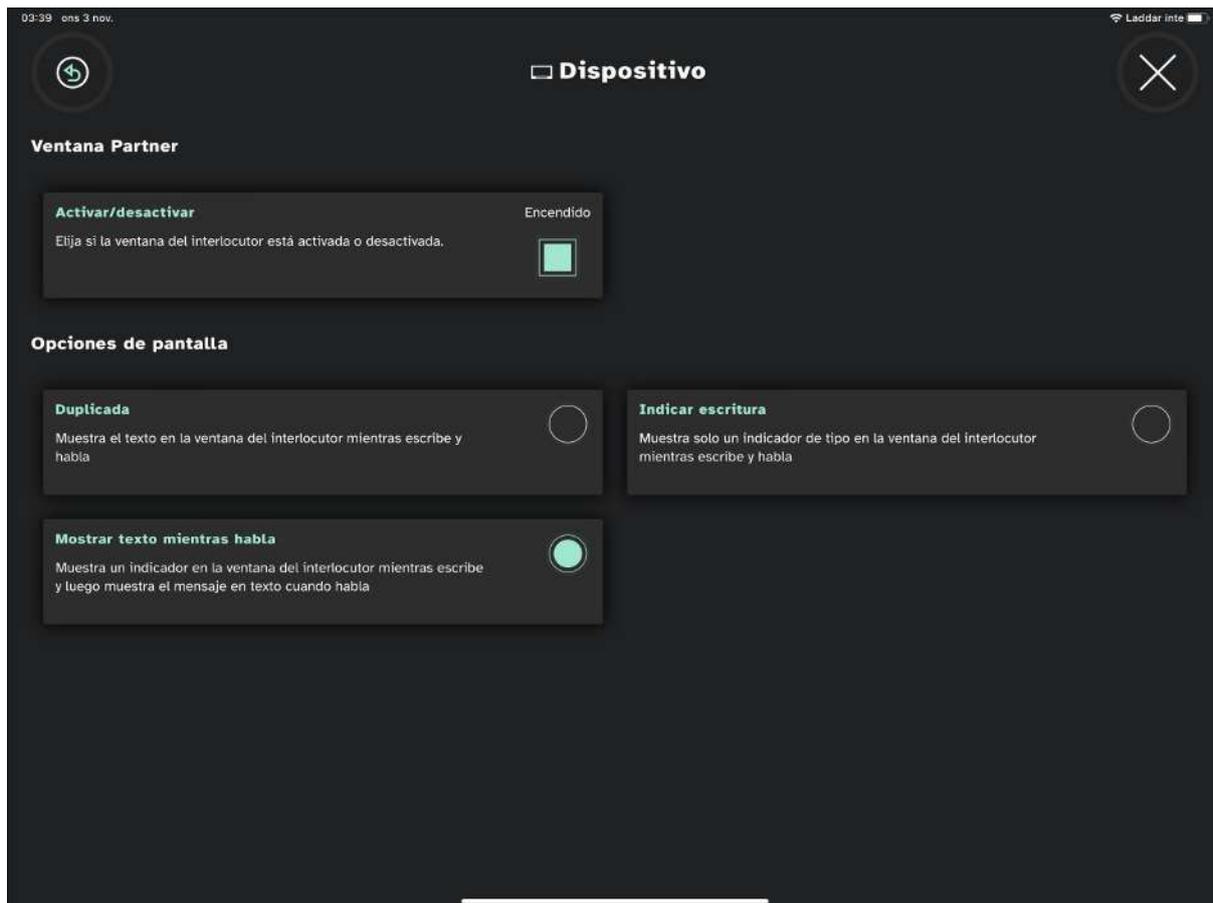

5.6.1 Ventana del interlocutor

5.6.1.1 ¿Cómo activar/desactivar la Ventana del interlocutor en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte inferior media de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono  (Dispositivo) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de **Abrir**.

6. Mire en la sección **Ventana del interlocutor**.

7. Cambie el botón **Activar/desactivar** para “**Elegir si la Ventana del interlocutor está activada/desactivada**” a:

- Encendido
- Apagado

8. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.
9. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.6.1.2 ¿Cómo configurar las opciones de visualización para la Ventana del interlocutor en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte inferior media de la pantalla.

2. Seleccione el botón  (Cuadro de mandos) para abrir Cuadro de mandos.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono  (Dispositivo) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.

5. Seleccione el botón de **Abrir**.

6. Mire en la sección **Opciones de pantalla**.

7. Seleccione uno de los siguientes botones para elegir la opción de pantalla para la Ventana del interlocutor:

- Duplicada: muestra el texto en la Ventana del interlocutor mientras escribe y habla.
- Mostrar texto mientras habla: muestra un indicador en la Ventana del interlocutor mientras escribe y luego muestra el mensaje en texto cuando habla.
- Indicar escritura: muestra solo un indicador de escritura en la Ventana del interlocutor mientras escribe y habla.

8. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

9. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.7 General

5.7.1 Idioma de la aplicación

5.7.1.1 ¿Cómo configurar el idioma de la aplicación en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón  (Cuadro de mandos) para abrirlo.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Seleccione el botón  (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

5. Seleccione el botón  (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
6. Busque el ícono  (General) para encontrar el apartado de configuración correcto.
7. Seleccione el botón de **Abrir**.
8. Busque en la sección de **Idioma de la aplicación**.
9. Seleccione el botón de **Cambiar**.
10. Seleccione el botón de opción junto al idioma en el que desea que esté la aplicación.
11. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.
12. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.7.2 Tamaño del texto

5.7.2.1 ¿Cómo modifico el tamaño del texto en TD Talk??

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón  (Cuadro de mandos) para abrirlo.
3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
4. Seleccione el botón  (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Seleccione el botón  (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
6. Busque el ícono  (General) para encontrar el apartado de configuración correcto.
7. Seleccione el botón de **Abrir**.
8. Busque en la sección **Tamaño de texto**.
9. Seleccione el botón de opción para el **Tamaño del texto** para uno de los siguientes valores:
 - **Predeterminado** (por defecto)
 - Grande
10. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.
11. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.7.3 Comentarios

5.7.3.1 ¿Cómo envío comentarios a Tobii Dynavox en TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón  (Cuadro de mandos) para abrirlo.
3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
4. Seleccione el botón  (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Seleccione el botón  (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
6. Busque el ícono  (General) para encontrar el apartado de configuración correcto.
7. Seleccione el botón de **Abrir**.
8. Busque en la sección **Comentarios**.
9. Seleccione el botón **Comentarios**.
10. Utilice el **teclado** para escribir su dirección de correo electrónico.
11. Seleccione el botón  del campo de texto Asunto.
12. Utilice el **teclado** para rellenar el asunto del correo electrónico.
13. Seleccione el botón  para el campo de texto Mensaje.
14. Utilice el **teclado** para enviar un mensaje.
15. Seleccione el botón  para cerrar el campo de texto Mensaje.
16. Seleccione el botón **Enviar comentarios** para enviarlos a Tobii Dynavox.
17. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.
18. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.7.4 Términos de servicio y aviso de privacidad

5.7.4.1 Cómo abrir los Términos de servicio

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón  (Cuadro de mandos) para abrirlo.
3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
4. Seleccione el botón  (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
5. Seleccione el botón  (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
6. Busque el ícono  (General) para encontrar el apartado de configuración correcto.
7. Seleccione el botón de **Abrir**.

8. Busque en la sección de **términos de servicio y aviso de privacidad**.
9. Seleccione el botón de **Abrir**.

10. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

11. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.7.4.2 Cómo abrir el aviso de privacidad

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón  (Cuadro de mandos) para abrirlo.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Seleccione el botón  (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

5. Seleccione el botón  (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

6. Busque el ícono  (General) para encontrar el apartado de configuración correcto.

7. Seleccione el botón de **Abrir**.

8. Busque en la sección de **términos de servicio y aviso de privacidad**.

9. Seleccione el botón de **Abrir**.

10. Seleccione el botón  (Avanzar).

11. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

12. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.7.5 Recopilar registros

5.7.5.1 ¿Cómo puedo recopilar registros para TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Lector ocular o en el área del Lector ocular.

El botón  (Cuadro de mandos) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón  (Cuadro de mandos) para abrirlo.

3. Seleccione la acción  (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Seleccione el botón  (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

5. Seleccione el botón  (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

6. Busque el ícono  (General) para encontrar el apartado de configuración correcto.

7. Seleccione el botón de **Abrir**.

Se abrirá la página de configuración General.

8. Mire en la sección **Recopilar registros**.

9. Seleccione el botón **Registro**.

10. Seleccione el botón **Sí**.



Los registros se crearán en el escritorio.

11. Seleccione el botón  (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

12. Seleccione el botón  (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

Copyright © Dynavox Group AB (Publ). No todos los productos y servicios que se ofrecen en cada mercado local. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Soporte técnico para su dispositivo Tobii Dynavox

Obtener ayuda en línea

Consulte la página de Soporte específica del producto de su dispositivo Tobii Dynavox. Contiene información actualizada sobre problemas y sugerencias y trucos relacionados con el producto. Consulte nuestras páginas de Soporte en línea en: <https://www.tobii-dynavox.com/pages/product-support>

Póngase en contacto con su consultor de soluciones o su distribuidor.

Si tiene alguna pregunta o experimenta problemas con su producto, póngase en contacto con su consultor de soluciones autorizado de Tobii Dynavox para recibir ayuda. Conocen su configuración personal y podrán ayudarlo con sugerencias y formación específica. Para consultar la información de contacto, visite <https://www.tobii-dynavox.com/pages/contact-us>.