

TD Talk

Manuale Utente



Manuale Utente TD Talk

Versione 1.8

2025-07-08

Tutti i diritti riservati.

Diritto d'autore © Dynavox Group AB (publ)

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, archiviata in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (elettronico, tramite fotocopia, registrazione o altro tipo) senza la preventiva autorizzazione scritta dell'autore.

La protezione del copyright rivendicata comprende tutti i materiali e le informazioni tutelabili dalle leggi sul copyright ora permessi per legge scritta o giudiziale o concessi più avanti, incluso, senza limitazione, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo quali schermate, menu e così via.

Le informazioni contenute in questo manuale sono di proprietà di Dynavox Group AB. La riproduzione, parziale o totale, senza la preventiva autorizzazione scritta di Dynavox Group AB è vietata.

I prodotti a cui viene fatto riferimento in questo documento possono essere marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari. L'editore e l'autore non riconoscono alcuna garanzia in merito a questi marchi.

Sebbene siano state prese tutte le possibili precauzioni nella preparazione di questo documento, l'editore e l'autore non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni oppure per danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute in questo documento o dei programmi e del codice sorgente forniti a corredo. In nessun caso l'editore e l'autore saranno responsabili per eventuali perdite di profitto o qualsiasi altro danno commerciale causato o presumibilmente causato direttamente o indirettamente dalle informazioni incluse in questo documento.

Il contenuto è soggetto a modifica senza preavviso.

Visitare il sito Web Tobii Dynavox.

www.TobiiDynavox.com per le versioni aggiornate di questo documento.

Recapiti:

Dynavox Group AB
Löjtnantsgatan 25
115 50 Stoccolma
Svezia
+46 8 522 950 20

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, Pennsylvania 15203
USA
+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
Regno Unito
+44 (0)114 481 00 11

Tobii Dynavox Pty. Ltd.
Trading as Link Assistive
11B MAB Eastern Promenade
Tonsley SA, 5042
Australia
+61 8 7120 6002

Tobii Dynavox (Suzhou) Co. Ltd
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP,
Suzhou
P.R.Cina 215021

+86 512 69362880



Sommario

1	Benvenuto	6
1.1	Requisiti di sistema	6
1.2	Lingue supportate	6
1.3	Come ottenere TD Suite	6
2	Risorse e supporto	7
2.1	Risorse Web e supporto	7
2.2	Hub di apprendimento.....	7
3	Per iniziare	8
3.1	Panoramica di TD Talk	8
3.2	Menu fuori schermo	9
3.2.1	Come posso accedere al Menu fuori schermo in TD Talk?	9
3.3	Dashboard	10
3.3.1	Come posso accedere al Dashboard in TD Talk?	10
3.3.2	Come uscire e chiudere TD Talk?.....	10
3.4	Configurazione di TD Talk	11
4	Utilizzo di TD Talk.....	13
4.1	Uso della tastiera	13
4.2	Uso delle predizioni.....	13
4.2.1	Predizione parole	13
4.2.2	Predizione di frase	14
4.3	Modifica di un messaggio	14
4.3.1	Come posso modificare un messaggio in TD Talk?.....	14
4.4	Copia e incolla	15
4.4.1	Come si utilizza la funzione Copia in TD Talk?.....	15
4.4.2	Come si utilizza la funzione Incolla in TD Talk?.....	15
4.5	Uso dei Messaggi rapidi.....	15
4.5.1	Come posso utilizzare i Messaggi rapidi in TD Talk?	15
4.5.2	Come posso cambiare l'argomento dei Messaggi rapidi?.....	16
4.6	Modifica della lingua	17
4.6.1	Come posso cambiare la lingua in TD Talk?	17
4.7	Chat	17
4.8	Modalità Trasparente	18
4.8.1	Come posso avviare la Modalità Trasparente?.....	18
4.8.2	Come posso terminare la Modalità Trasparente	18
4.9	Come posso utilizzare l'espansione abbreviazioni in TD Talk?	18
4.10	Come posso annullare un'azione in TD Phone?.....	19
5	Impostazioni di TD Talk	20
5.1	Il mio account.....	21
5.1.1	Cos'è un account myTobiiDynavox?.....	21
5.1.2	Come posso creare un account myTobiiDynavox?.....	21
5.1.3	Come posso eseguire il backup dei miei dati personalizzati?	21
5.1.4	Come posso eseguire il ripristino dei miei dati personalizzati?	22

5.2	Attivazione	22
5.2.1	Metodo di attivazione	23
5.2.1.1	Come posso selezionare il mio Metodo di attivazione in TD Talk?	23
5.2.2	Pulsanti	24
5.2.2.1	Come posso modificare il Tempo di selezione per l'attivazione dei pulsanti in TD Talk?.....	24
5.2.2.2	Come posso regolare il Tempo di selezione per l'attivazione dei pulsanti in TD Talk?.....	24
5.2.3	Input sensore	25
5.2.3.1	Come posso impostare un Input sensore per il mio Sensore in TD Talk?	25
5.3	Tastiera	26
5.3.1	Metodo di attivazione	26
5.3.1.1	Come possono selezionare il mio Metodo di attivazione per la Tastiera in TD Talk?	26
5.3.2	Pulsanti	27
5.3.2.1	Come posso modificare il Tempo di selezione per i pulsanti della tastiera in TD Talk?	27
5.3.2.2	Come posso regolare il Tempo di selezione per l'attivazione dei pulsanti in TD Talk?.....	27
5.3.3	Predizione	28
5.3.3.1	Come posso modificare il Tempo di selezione per i pulsanti di predizione in TD Talk?	28
5.3.3.2	Come posso regolare il Tempo di selezione per i pulsanti di predizione in TD Talk?	29
5.3.4	Generale	29
5.3.4.1	Come posso aggiungere/scaricare una nuova lingua/lingua tastiera in TD Talk?	29
5.3.4.2	Come posso selezionare e attivare le lingue della tastiera da utilizzare/rendere disponibili in TD Talk?.....	30
5.3.4.3	Come posso attivare/disattivare il Feedback sonoro di digitazione in TD Talk?	30
5.4	Conversazioni	31
5.4.1	Argomenti.....	32
5.4.1.1	Come posso creare un nuovo argomento in TD Talk?.....	32
5.4.1.2	Come posso modificare il nome di un argomento in TD Talk?.....	32
5.4.1.3	Come posso creare un argomento privato in TD Talk?.....	33
5.4.1.4	Come posso selezionare gli argomenti attivi in TD Talk?	33
5.4.1.5	Come posso eliminare un argomento in TD Talk?	34
5.4.1.6	Come posso modificare i Messaggi rapidi in TD Talk?	34
5.4.1.7	Come posso aggiungere un Messaggio rapido in TD Talk?	35
5.4.1.8	Come posso eliminare un Messaggio rapido in TD Talk?.....	36
5.4.2	Espansione abbreviazioni	37
5.4.2.1	Come posso aggiungere un'espansione delle abbreviazioni in TD Talk?.....	37
5.4.2.2	Come posso modificare un'espansione delle abbreviazioni in TD Talk?.....	38
5.4.2.3	Come posso eliminare un'espansione delle abbreviazioni in TD Talk?.....	38
5.5	Voce	39
5.5.1	Voci	40
5.5.1.1	Voci installate e scaricabili	40
5.5.1.1.1	Come posso scaricare una nuova voce in TD Talk?..	40
5.5.1.1.2	Come posso selezionare la mia voce in TD Talk?	41

	5.5.1.1.3	Come posso applicare un Filtro alle Voci disponibili in TD Talk?	41
	5.5.1.2	Configurazione voce.....	42
	5.5.1.2.1	Come posso modificare la mia voce in TD Talk?	42
	5.5.1.3	Pronunce.....	43
	5.5.1.3.1	Come posso di creare eccezioni di pronuncia in TD Talk?.....	43
5.5.2		Voice Banking Accounts	44
	5.5.2.1	Voice Banking Accounts.....	44
	5.5.2.1.1	Come posso utilizzare la mia voce dal mio servizio Voice Banking?	44
5.6		Dispositivo	46
	5.6.1	Finestra Partner	46
	5.6.1.1	Come posso abilitare/disabilitare la Finestra Partner in TD Talk? ..	46
	5.6.1.2	Come posso impostare le opzioni di visualizzazione della Finestra Partner in TD Talk?	47
5.7		Generale	47
	5.7.1	Lingua applicazione	47
	5.7.1.1	Come posso impostare la mia lingua dell'applicazione in TD Talk?	47
	5.7.2	Dimensione testo	48
	5.7.2.1	Come posso modificare la dimensione testo in TD Talk?	48
	5.7.3	Feedback	48
	5.7.3.1	Come posso inviare il feedback a Tobii Dynavox in TD Talk?	48
	5.7.4	Termini di servizio e Informativa sulla privacy.....	49
	5.7.4.1	Come posso aprire i Termini di servizio	49
	5.7.4.2	Come posso aprire l'Informativa sulla privacy	50
	5.7.5	Raccogli registri.....	50
	5.7.5.1	Come posso raccogliere i log per TD Talk?	50

1 Benvenuto

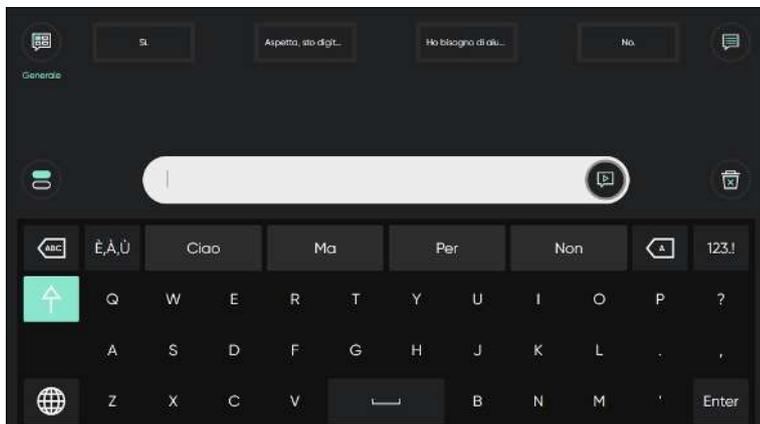


Illustrazione 1: TD Talk

TD Talk consente alle persone di comunicare ciò che sono e ciò che vogliono dire, nel modo più fluido possibile. È progettato per velocizzare più possibile la costruzione della frase. TD Talk consente agli utenti di utilizzarlo per rimanere una parte attiva della conversazione. TD Talk ha caratteristiche e funzionalità famigliari, in modo che gli utenti possano prendere dimestichezza nel minor tempo possibile. Imparando lo schema delle frasi e l'utilizzo delle parole esclusivi di una persona, TD Talk si adatta di continuo per offrire opzioni personalmente pertinenti per la comunicazione.

1.1 Requisiti di sistema

Tabella 1: iOS

	Sistema operativo	Dispositivo	Memoria	Tocco	Camera/ Fotocamera
Minimo	iOS 15,1	iPad 7a generazione	4 GB	Touch integrato	Telecamera integrata
Consigliato	iOS 15,1	iPad 8a generazione	4 GB	Touch integrato	Telecamera integrata

1.2 Lingue supportate

- Danese (DK)
- Olandese (NL)
- Inglese (US)
- Francese (FR)
- Tedesco (DE)
- Italiano (IT)
- Norvegese (NO)
- Spagnolo (America Latina)
- Svedese (SE)
- Altre lingue in arrivo!

1.3 Come ottenere TD Suite

TD Talk è disponibile su TobiiDynamox.com per i dispositivi Windows e su Apple App Store per quelli iPadOS.

2 Risorse e supporto

Tobii Dynavox offre diverse risorse gratuite per il supporto e l'assistenza durante l'uso di TD Talk. Non perdetevi questi strumenti che vi aiuteranno a trarre il massimo dal vostro software Tobii Dynavox!

2.1 Risorse Web e supporto

Se avete bisogno di supporto, il primo passo deve essere la consultazione della sezione Formazione e supporto del sito Web Tobii Dynavox.

2.2 Hub di apprendimento



L'Hub di apprendimento è al momento solo lingua inglese.

Visitate learn.tobiidynavox.com per la documentazione, la formazione e altre risorse, tra cui:

- risposte alle domande più frequenti
- video di formazione
- webinar registrati
- corsi online

3 Per iniziare

Se TD Talk verrà utilizzato con un eye tracker, assicuratevi di avere una calibrazione attiva per l'eye tracker.

- iOS — utilizzare l'app TD CoPilot per la configurazione dell'eye tracker.

Per informazioni dettagliate, vedere il Manuale utente di TD Pilot.

3.1 Panoramica di TD Talk

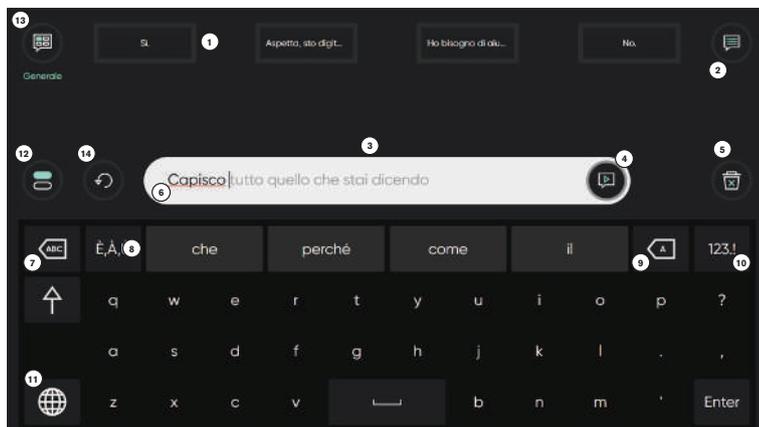


Illustrazione 2: TD Talk

Posizione	Descrizione	Posizione	Descrizione
1	Messaggi rapidi Messaggi pre-scritti che vengono pronunciati immediatamente quando selezionati	8	Predizione parole/Espansione abbreviazioni Predice automaticamente le parole in base a quanto digitato fino ad allora. Quando si utilizza Espansione abbreviazioni, la prima parola viene sostituita con l'espansione.
2	Altri messaggi rapidi Consente di accedere a tutti i messaggi rapidi per l'argomento corrente.	9	Backspace Consente di eliminare il carattere a sinistra del cursore.
3	Finestra Messaggio Visualizzare e modificare qui il testo che si desidera pronunciare.	10	Pagina dei numeri Consente di accedere ai numeri e ai caratteri speciali.
4	Parla Consente di pronunciare il testo nella Finestra Messaggio. È anche possibile mettere in pausa e riavviare la vocalizzazione.	11	Cambio lingua Consente di cambiare lingua.
5	Cancella Consente di cancellare tutto il testo nella Finestra Messaggio.	12	Chat Consente di passare alla seconda Finestra Messaggio per scrivere un nuovo messaggio senza perdere il testo nella prima Finestra Messaggio.
6	Predizione di frase TD Talk impara da quello che si digita e usa tali informazioni per la predizione delle frasi. La predizione è basata sulla frequenza e può rendere la comunicazione più veloce e personale.	13	Argomenti Consente di organizzare i propri messaggi rapidi per argomento. Consente di passare a un argomento per accedere ai relativi messaggi.

Posizione	Descrizione	Posizione	Descrizione
7	Elimina parola Consente di eliminare la parola a sinistra del cursore.	14	Annulla Consente di annullare le azioni nella Finestra Messaggio.

3.2 Menu fuori schermo

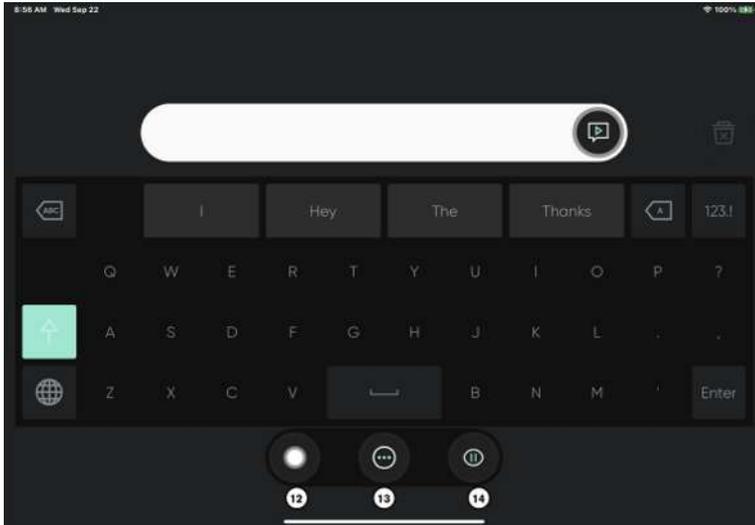


Illustrazione 3: Menu fuori schermo di TD Talk

Posizione	Descrizione	Posizione	Descrizione
14	AssistiveTouch Attivare AssistiveTouch. Usare AssistiveTouch per accedere alla schermata iniziale e a tutte le altre app.	16	Sospendi/Riprendi controllo oculare Azionare il pulsante per sospendere e ripristinare il controllo oculare.
15	Altro Consente di accedere al Dashboard e alle Impostazioni.	17	Modalità Trasparente Consente di rendere trasparente l'interfaccia di TD Talk e di attivare la fotocamera posteriore. Questa modalità può essere utilizzata per vedere cosa c'è davanti al dispositivo, ad esempio il proprio partner di comunicazione, mentre è in uso TD Talk.

3.2.1 Come posso accedere al Menu fuori schermo in TD Talk?

Ci sono due modi per accedere al Menu fuori schermo in TD Talk:

- **Come utente:** Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
- **Come assistente:** Scorrere il dito verso l'alto dalla lettera **T** sulla tastiera TD Talk.

3.3 Dashboard

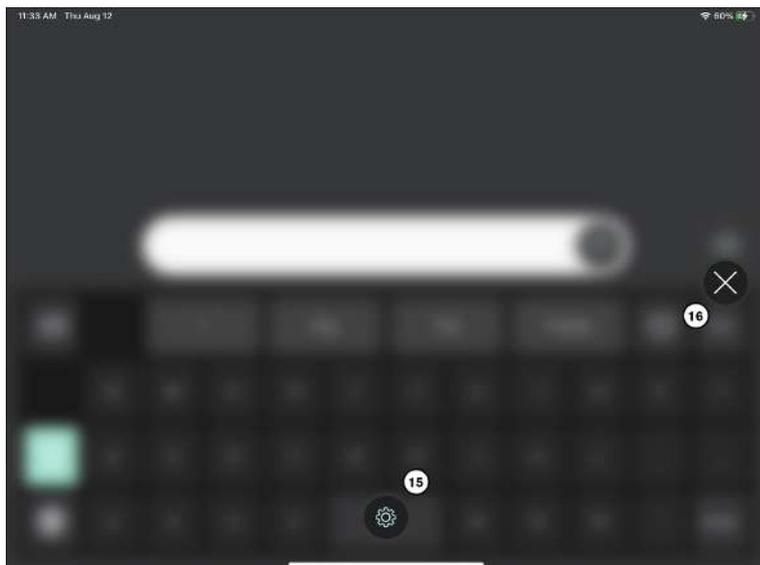


Illustrazione 4: Dashboard di TD Talk

Posizione	Descrizione	Posizione	Descrizione
15	Impostazioni di TD Talk Per ulteriori informazioni, vedere <i>5 Impostazioni di TD Talk, pagina 20</i>	16	Esci dal dashboard Selezionare il pulsante per uscire dal Dashboard.

3.3.1 Come posso accedere al Dashboard in TD Talk?

- Accedere alle impostazioni in uno dei seguenti modi:
 - **Come utente:** Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
 - **Come assistente:** Scorrere il dito verso l'alto dalla lettera T sulla tastiera TD Talk.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

- Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3.3.2 Come uscire e chiudere TD Talk?

- Accedere alle impostazioni in uno dei seguenti modi:
 - **Come utente:** Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
 - **Come assistente:** Scorrere il dito verso l'alto dalla lettera T sulla tastiera TD Talk.

Il pulsante  (AssistiveTouch) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

- Selezionare il pulsante  (AssistiveTouch) per aprire il menu di AssistiveTouch.
- Selezionare il pulsante  (Home) dal menu di AssistiveTouch.

3.4 Configurazione di TD Talk

1. Selezionare l'app  TD Talk sulla schermata iniziale del dispositivo iPadOS.
2. Accedere alle impostazioni in uno dei seguenti modi:
 - **Come utente:** Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
 - **Come assistente:** Scorrere il dito verso l'alto dalla lettera T sulla tastiera TD Talk.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

3. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

4. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.
5. Impostare la lingua dell'applicazione TD Talk:

- Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
- Cercare l'icona  (Generali) per individuare la scheda impostazioni corretta.
- Selezionare il pulsante **Apri**.
- Guardare nella sezione **Lingua applicazione**.
- Selezionare il pulsante di opzione accanto alla lingua desiderata per l'applicazione.

- Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni di TD Talk.
6. Selezionare la voce o le voci da utilizzare:

- Cercare l'icona  (Voce) per individuare la scheda impostazioni corretta.
- Selezionare il pulsante **Apri**.
- Guardare nella sezione **Le tue voci**.
- Selezionare il pulsante di opzione sotto la lingua installata che si desidera usare.

 Se la lingua desiderata non è presente, vedere [5.3.4.1 Come posso aggiungere/scaricare una nuova lingua/lingua tastiera in TD Talk?](#), pagina 29 e [5.3.4.2 Come posso selezionare e attivare le lingue della tastiera da utilizzare/rendere disponibili in TD Talk?](#), pagina 30.

- Selezionare il pulsante radio accanto alla voce da usare nell'elenco delle voci disponibili per la lingua da utilizzare.

Usare i pulsanti "Scorri su" e "Scorri giù" a destra per scorrere l'elenco delle voci disponibili per la lingua desiderata.

 Per provare una voce, selezionare  accanto alla voce, se disponibile.

 Se è presente  (scarica) al posto di un pulsante di opzione, selezionare il pulsante per scaricare la voce.

- Ripetere gli ultimi due passaggi suddetti se si desidera poter parlare in più di una lingua.

7. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.



In TD Talk è possibile selezionare rapidamente la lingua fra quelle scelte, selezionando il pulsante nell'angolo inferiore sinistro della tastiera.



4 Utilizzo di TD Talk

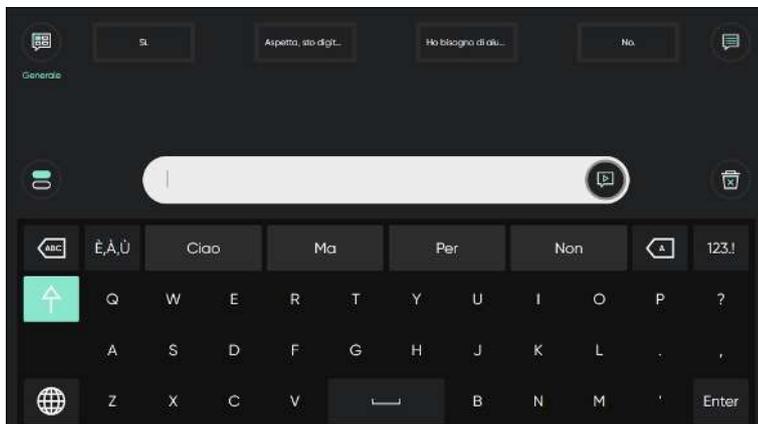


Illustrazione 5: TD Talk

4.1 Uso della tastiera

Selezionando le lettere sulla tastiera, le parole e le frasi vengono formulate (o costruite) nella Finestra Messaggio.


Quando si è pronti a parlare, selezionare il pulsante  (Parla).

4.2 Uso delle predizioni

TD Talk offre entrambe le funzioni Predizione parole e Predizione frasi che consentono di ridurre lo sforzo e/o di aumentare la velocità di produzione dei messaggi.

4.2.1 Predizione parole

Il motore di predizione parole utilizzato in TD Talk è di SwiftKey™ e viene comunemente utilizzato in tablet e smartphone. SwiftKey™ utilizza diverse tecnologie di intelligenza artificiale per prevedere la parola successiva che l'utente intende digitare. SwiftKey™ apprende dal testo che l'utente ha scritto in precedenza e visualizza suggerimenti basati sul testo immesso e sul testo appreso. La lingua della funzione Scrittura facilitata parole cambierà in base all'impostazione di Lingua tastiera.

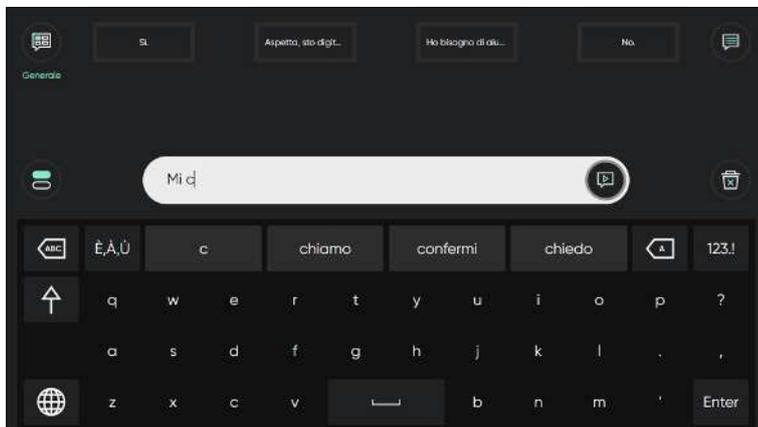


Quando Predizione parole è in uso, sulla tastiera vengono visualizzate quattro (4) caselle. Nella casella all'estrema sinistra è visualizzata la parola più probabile, mentre le tre (3) caselle rimanenti contengono ciascuna una parola prevista. Per selezionare una parola prevista, selezionare una casella contenente la parola corretta. Se la parola desiderata non è presente, continuare a digitare caratteri finché non viene visualizzata la parola desiderata.

Se si utilizza la funzione Predizione parole e si desidera digitare una parola che contiene un accento, come caffè, lasciare che sia la funzione a farlo, evitando sforzi e perdite di tempo. Digitando “caffè” si otterrà come suggerimento la parola “caffè”.

4.2.2 Predizione di frase

TD Talk apprende e analizza il modo di parlare dell'utente nel tempo. La Predizione parole apprende le parole pronunciate dall'utente. La Predizione frasi apprende il modo in cui l'utente mette insieme tali parole per formare un gruppo di frasi personale. Quando si inizia a digitare, le frasi predette prese dal gruppo di frasi personale vengono offerte nella Finestra messaggio con il testo in grigio.

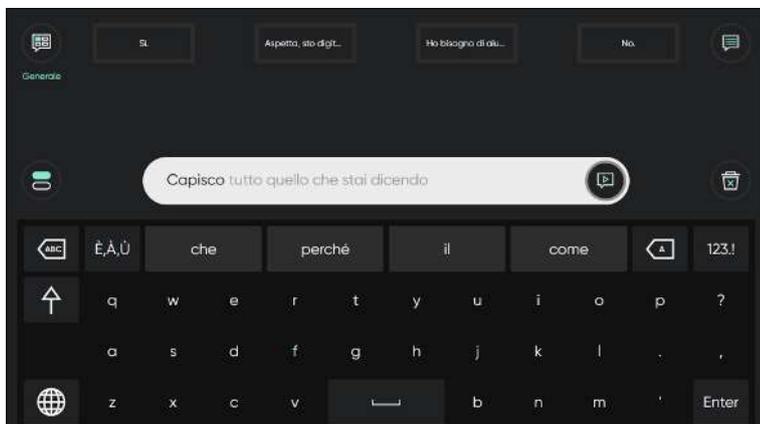

Guardare e fissare lo sguardo sull'ultima parola della frase predetta per selezionare tale frase. Il colore della frase passa da grigio a nero per indicare che è stata selezionata e ora è pronta per essere pronunciata o modificata.

4.3 Modifica di un messaggio

4.3.1 Come posso modificare un messaggio in TD Talk?

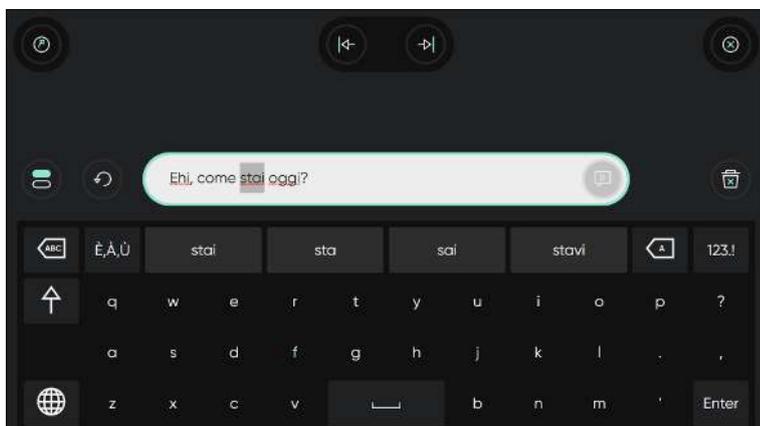


Illustrazione 6: Menu Modifica

1. Guardare il testo nella Finestra Messaggio per effettuare la modifica nella Finestra Messaggio. Si aprirà il menu Modifica.
2. Quando viene selezionata una parola, digitare quella sostitutiva, selezionare una parola dalla predizione parole o selezionare Elimina.

Utilizzare le frecce  (Sposta a sinistra) e  (Sposta a destra) se il cursore si trova nella posizione sbagliata.

3. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire dalla modalità Modifica.

4.4 Copia e incolla

4.4.1 Come si utilizza la funzione Copia in TD Talk?

 La funzione copia in TD Talk consente di copiare l'intera Finestra Messaggio.

1. Guardare il testo nella Finestra Messaggio per effettuare la modifica nella Finestra Messaggio. Si aprirà il menu Modifica.

Selezionare il pulsante  (Copia).

4.4.2 Come si utilizza la funzione Incolla in TD Talk?

1. Guardare la Finestra Messaggio vuota. Si aprirà il menu Copia.

Selezionare il pulsante  (Incolla).
Il messaggio viene visualizzato nella Finestra Messaggio.

 È possibile incollare il testo copiato da una sorgente di testo in qualsiasi altro software sul dispositivo.

 In iOS, Apple visualizzerà una finestra a comparsa quando si effettua la funzione Incolla tra applicazioni diverse. È possibile consentire questa operazione ogni volta tramite l'Assistive Touch OPPURE è possibile modificare le Impostazioni di Apple per consentire sempre tale operazione. TD Talk chiederà se si desidera andare a tale Impostazione.

4.5 Uso dei Messaggi rapidi

4.5.1 Come posso utilizzare i Messaggi rapidi in TD Talk?

Ci sono due (2) tipi di Messaggi rapidi: i primi sono sempre visibili sulla schermata iniziale. I secondi si trovano sotto il


pulsante  (Altri messaggi rapidi).

Messaggi rapidi sulla schermata iniziale

1. Selezionare il **Messaggio rapido** da pronunciare.
Il messaggio selezionato verrà pronunciato immediatamente senza essere aggiunto alla Finestra Messaggio e senza interferire con eventuali messaggi in fase di elaborazione.

Altri messaggi rapidi


1. Selezionare il pulsante  (Altri messaggi rapidi).

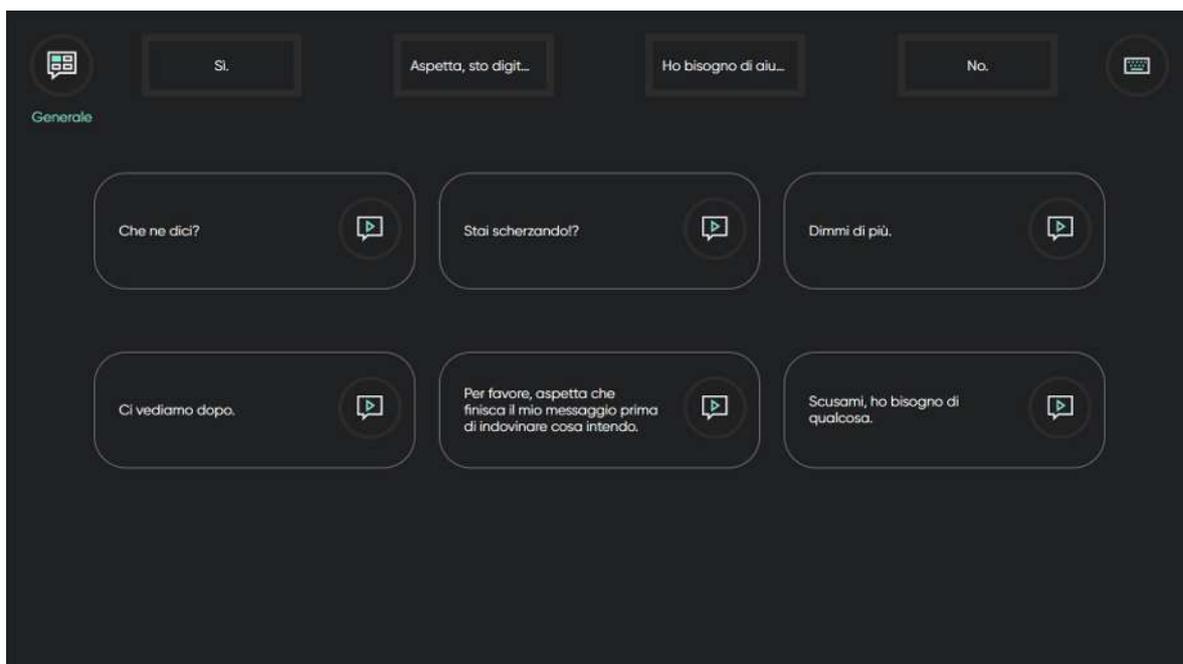

2. Selezionare il pulsante  (Parla) accanto al messaggio.
3. Selezionare il pulsante  (Tastiera) per tornare alla schermata iniziale.

4.5.2 Come posso cambiare l'argomento dei Messaggi rapidi?

1. Selezionare il pulsante  (menu Argomenti).
2. Selezionare il nuovo argomento.

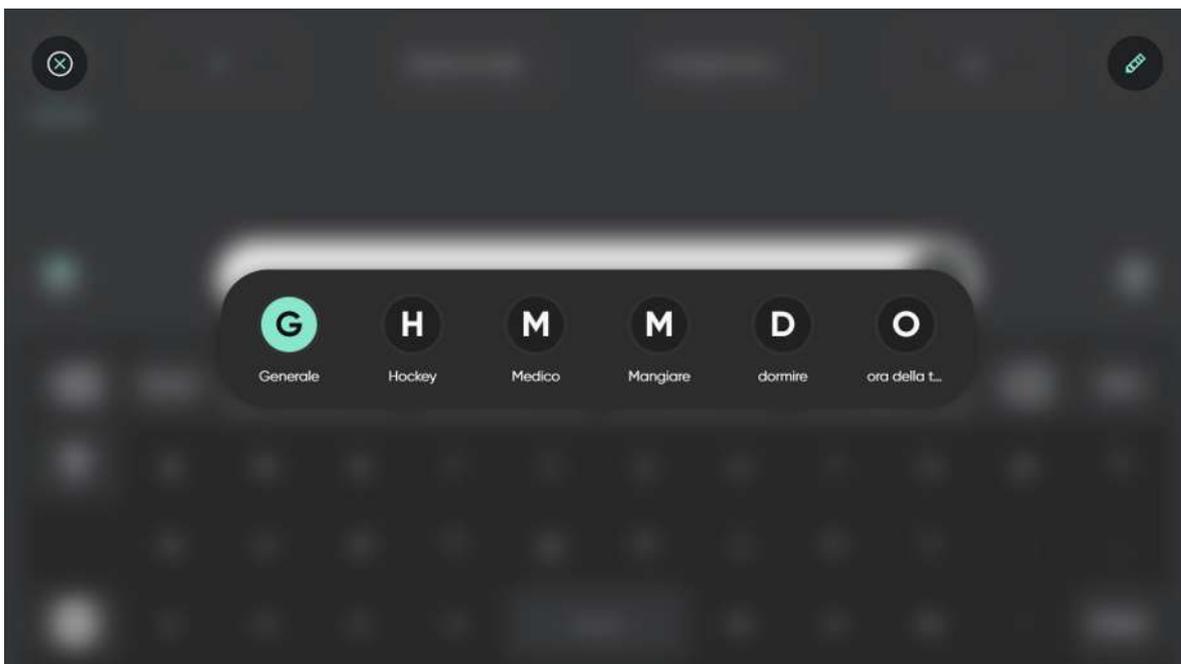

 Selezionare il pulsante  (Modifica) per cambiare gli argomenti visualizzati/disponibili nel menu Argomenti. Per ulteriori informazioni, vedere [5.4.1 Argomenti, pagina 32](#).

4.6 Modifica della lingua

4.6.1 Come posso cambiare la lingua in TD Talk?


1. Selezionare il pulsante  (Lingua) sulla tastiera.
2. Selezionare la lingua da usare
Se la lingua desiderata non è presente, vedere [5.3.4.1 Come posso aggiungere/scaricare una nuova lingua/lingua tastiera in TD Talk?, pagina 29](#)
3. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare indietro

4.7 Chat

Selezionare l'icona  (Chat) per passare alla seconda Finestra Messaggio per scrivere un nuovo messaggio senza perdere il testo nella prima Finestra Messaggio.

Selezionare l'icona  (Ripristino chat) per tornare alla prima Finestra Messaggio.

4.8 Modalità Trasparente

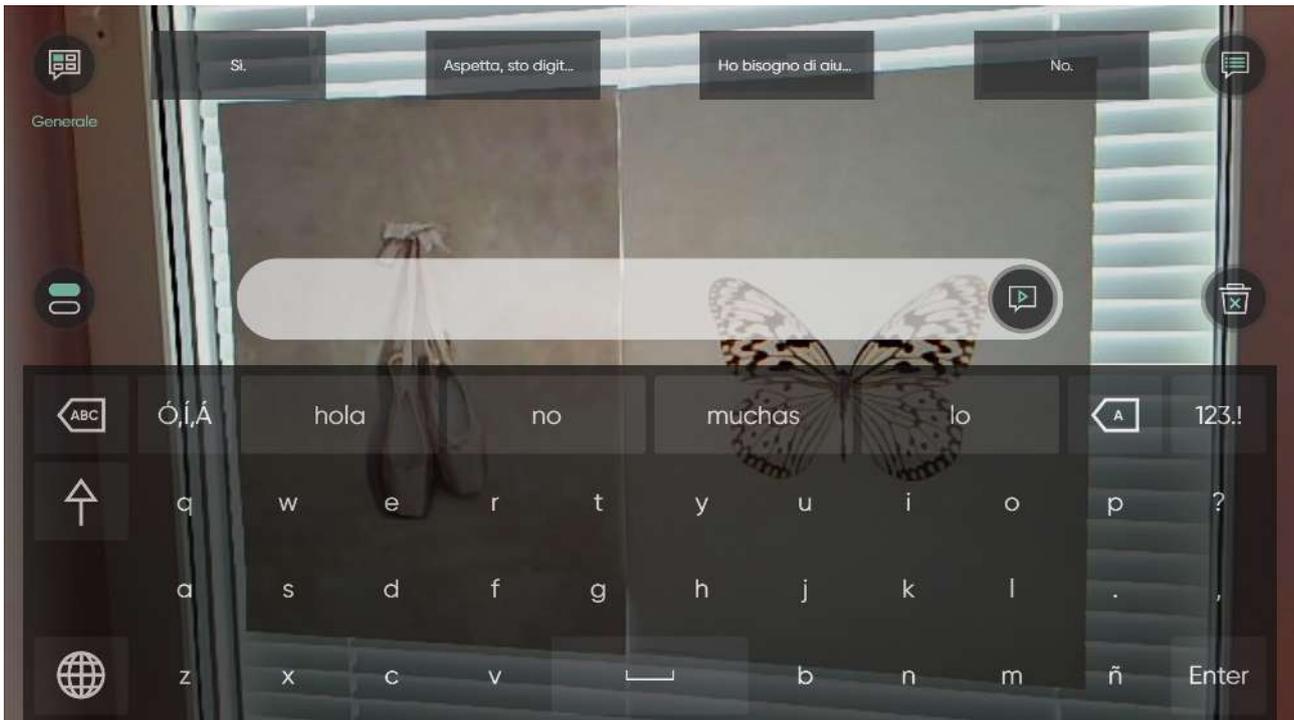

Consente di rendere trasparente l'interfaccia di TD Talk e di attivare la fotocamera posteriore. Questa modalità può essere utilizzata per vedere cosa c'è davanti al dispositivo, ad esempio il proprio partner di comunicazione, mentre è in uso TD Talk.

4.8.1 Come posso avviare la Modalità Trasparente?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Off-Screen Menu diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.



2. Selezionare il pulsante (Modalità Trasparente).

4.8.2 Come posso terminare la Modalità Trasparente


1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'eye tracker o nell'area dell'eye tracker. Off-Screen Menu diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.



2. Selezionare il pulsante (Fine Modalità Trasparente).

4.9 Come posso utilizzare l'espansione abbreviazioni in TD Talk?

Quando si digita un'abbreviazione esistente, la prima posizione nelle predizioni delle parole passerà all'Espansione abbreviazioni.

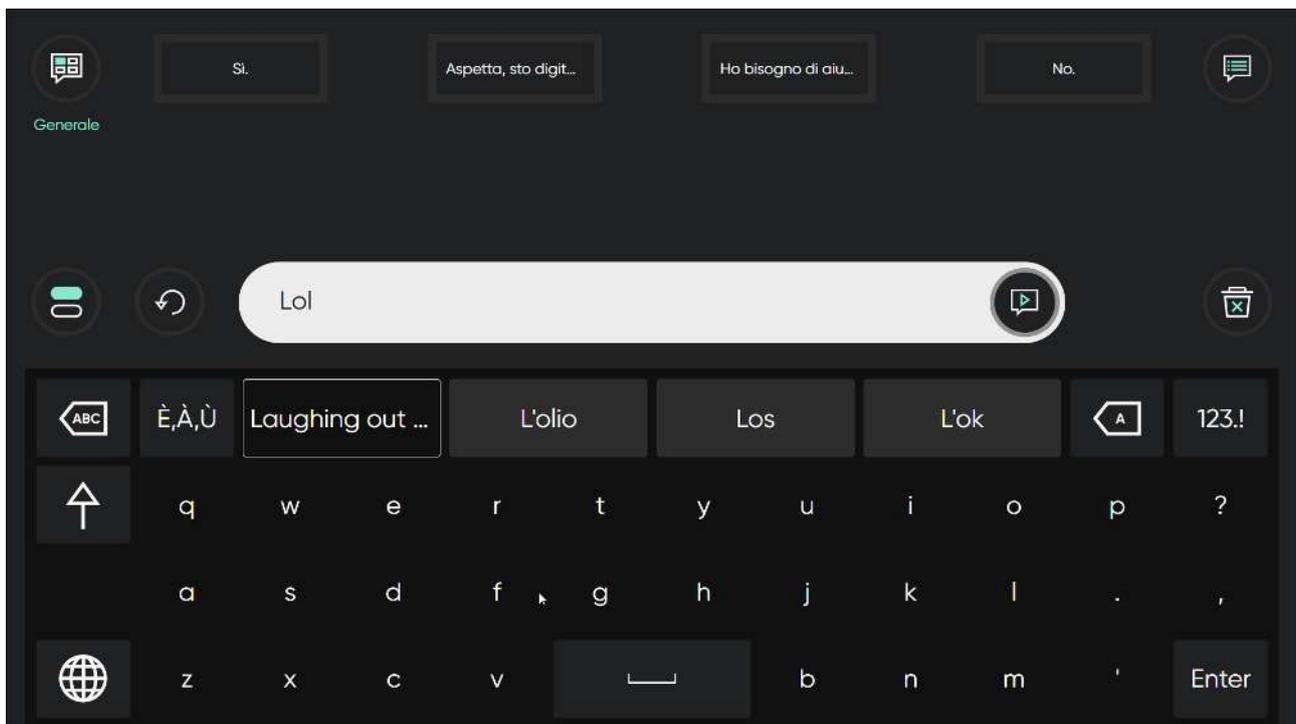


Selezionare Espansione abbreviazioni nell'area della predizione di parole per espandere l'abbreviazione nella Finestra Messaggio.

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta, sulla modifica e sull'eliminazione dell'espansione delle abbreviazioni, vedere Espansione abbreviazioni.

4.10 Come posso annullare un'azione in TD Phone?


Selezionare il pulsante  (Annulla) accanto alla Finestra Messaggio per annullare le azioni eseguite nella Finestra messaggio dal momento in cui è stata avviata la digitazione nella Finestra Messaggio attiva, una alla volta.

5 Impostazioni di TD Talk

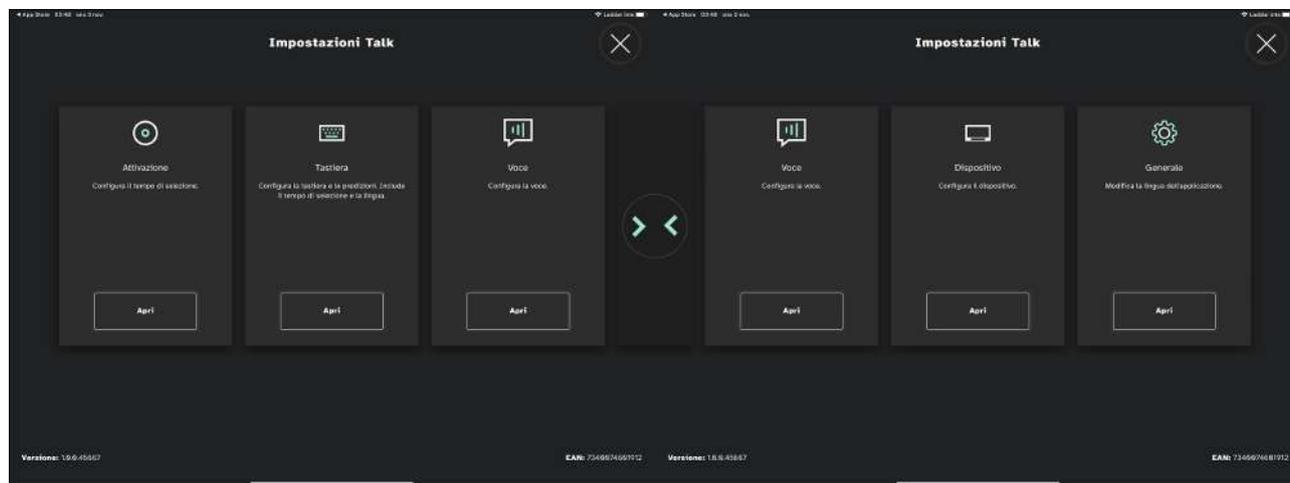

Icone	Azione	Descrizione
	Attivazione	Disponibile solo se è installato e abilitato un Eye Tracker. Aprire le impostazioni Attivazione . Per ulteriori informazioni, vedere <i>5.2 Attivazione, pagina 22</i> .
	Tastiera	Aprire le impostazioni Tastiera . Per ulteriori informazioni, vedere <i>5.3 Tastiera, pagina 26</i> .
	Voce	Aprire le impostazioni Voce . Per ulteriori informazioni, vedere <i>5.5 Voce, pagina 39</i> .
	Dispositivo	Aprire le impostazioni Dispositivo . Per ulteriori informazioni, vedere <i>5.6 Dispositivo, pagina 46</i> .
	Generale	Aprire le impostazioni Generali . Per ulteriori informazioni, vedere <i>5.7 Generale, pagina 47</i> .

5.1 Il mio account

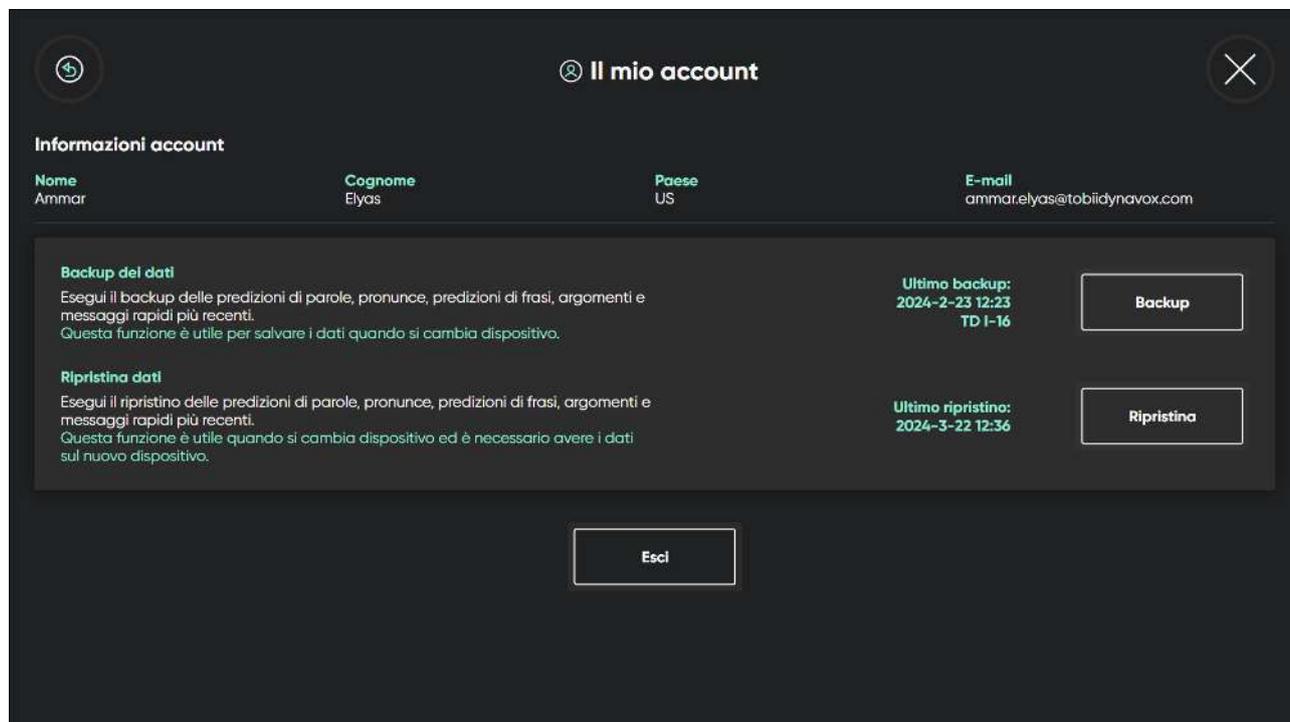

Accedere a myTobiiDynavox Account per eseguire il backup e ripristinare le predizioni di parole, le pronunce, le predizioni di frasi, gli argomenti e i messaggi rapidi personali sui propri dispositivi.

5.1.1 Cos'è un account myTobiiDynavox?

myTobiiDynavox Account è una piattaforma online fornita da Tobii Dynavox, un'azienda specializzata in tecnologia di assistenza per persone con difficoltà di comunicazione e mobilità. myTobiiDynavox Account consente agli utenti di accedere a varie risorse, inclusi il backup e il ripristino dei dati personalizzati, gli aggiornamenti software, i materiali di supporto, i forum per utenti e i corsi di formazione online. Funziona anche da hub centrale per la gestione delle impostazioni dei dispositivi, la creazione e la condivisione di tabelle di comunicazione nonché l'accesso a funzioni aggiuntive personalizzate in base alle esigenze delle persone che utilizzano i dispositivi Tobii Dynavox. In generale, si tratta di una piattaforma centrale che consente agli utenti di gestire le relative soluzioni di tecnologia di assistenza e di trovare supporto all'interno della community Tobii Dynavox.

5.1.2 Come posso creare un account myTobiiDynavox?

Andare su [Crea un account myTobiiDynavox](#) per creare un account myTobiiDynavox.

5.1.3 Come posso eseguire il backup dei miei dati personalizzati?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.



4. Cercare l'icona  (Accesso) nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
5. Utilizzare la tastiera per digitare il proprio nome utente nel campo **Nome utente**.
6. Utilizzare la tastiera per digitare la password nel campo **Password**.
7. Selezionare il pulsante **Accedi**.
8. Selezionare il pulsante **Backup**.

Quando viene eseguito un backup, a sinistra del pulsante Backup vengono visualizzati la data del backup e il dispositivo dal quale viene effettuato il backup.



9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire:

5.1.4 Come posso eseguire il ripristino dei miei dati personalizzati?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.



Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.



3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.



4. Cercare l'icona  (Accesso) nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
5. Utilizzare la tastiera per digitare il proprio nome utente nel campo **Nome utente**.
6. Utilizzare la tastiera per digitare la password nel campo **Password**.
7. Selezionare il pulsante **Accedi**.
8. Selezionare il pulsante **Ripristina**.

Quando viene eseguito un ripristino, a sinistra del pulsante Ripristina viene visualizzata la data del ripristino.




9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire:

5.2

Attivazione



Disponibile solo se è installato e abilitato un Eye Tracker.

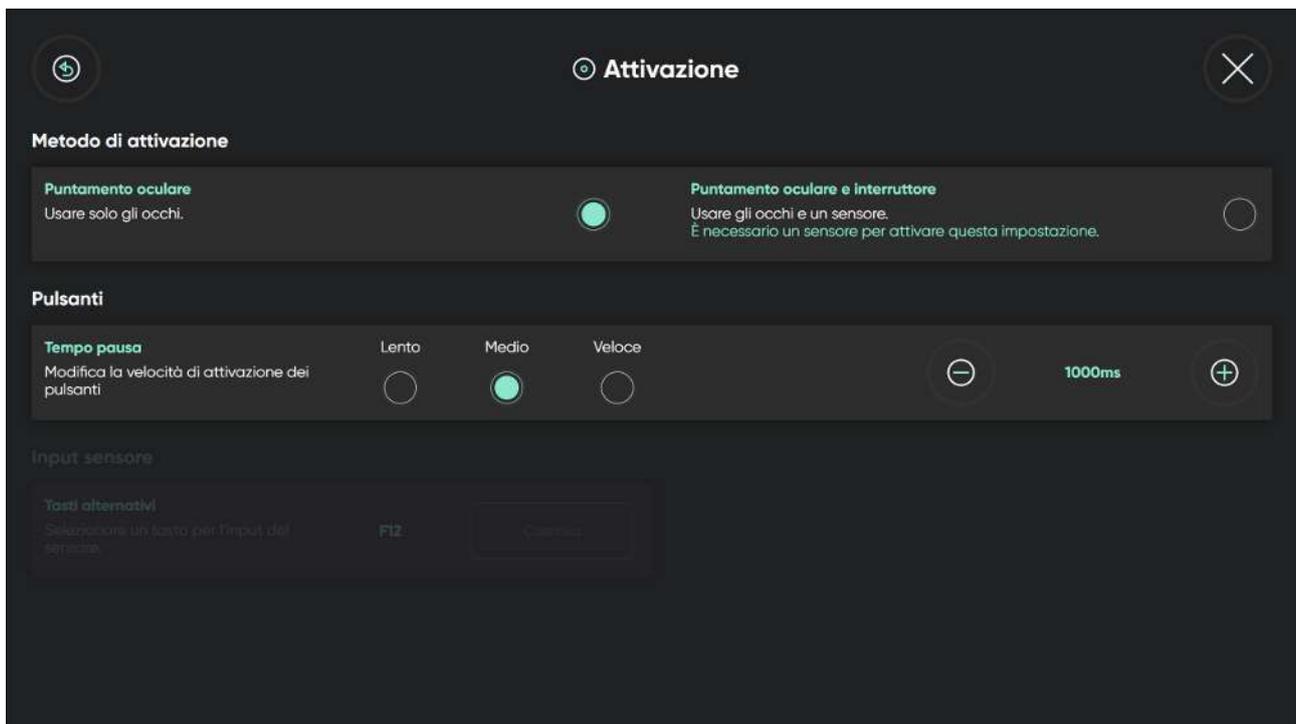

5.2.1 Metodo di attivazione

5.2.1.1 Come posso selezionare il mio Metodo di attivazione in TD Talk?

 La selezione del Metodo di attivazione per Attivazione non si riferisce all'attivazione dei tasti della tastiera ma a tutte le altre attivazioni in TD Talk.

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Attivazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Guardare nella sezione **Metodo di attivazione**.

7. Selezionare il pulsante radio per il **Metodo di attivazione** da utilizzare dai valori seguenti:
 - **Gaze** - Usare solo gli occhi (impostazione predefinita)
 - Puntamento oculare e sensore - Usare gli occhi e un sensore.

 È necessario un sensore per attivare questa impostazione.

8. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.

9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.2.2 Pulsanti

5.2.2.1 Come posso modificare il Tempo di selezione per l'attivazione dei pulsanti in TD Talk?

 I pulsanti non sono collegati a quelli sulla tastiera ma a quelli che si trovano in altre posizioni in TD Talk.

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Attivazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Guardare nella sezione **Pulsanti**.

7. Selezionare il pulsante di opzione **Tempo di selezione** scegliendo uno dei valori seguenti:
 - Lento
 - **Medio** (predefinito)
 - Veloce

8. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni di TD Talk.

9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni di TD Talk.

5.2.2.2 Come posso regolare il Tempo di selezione per l'attivazione dei pulsanti in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Attivazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Guardare nella sezione **Pulsanti**.

7. Selezionare uno dei pulsanti seguenti per regolare il **Tempo di selezione**:

–  — per ridurre il Tempo di selezione

–  — per aumentare il Tempo di selezione

Il valore può essere modificato nell'intervallo 200 ms — infinito

8. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni di TD Talk.

9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni di TD Talk.

5.2.3 Input sensore

Some switches requires that a keyboard key is set for switch input.



Se viene impostato un Input sensore, quel tasto della tastiera funzionerà da sensore, se selezionato su una tastiera esterna collegata.

5.2.3.1 Come posso impostare un Input sensore per il mio Sensore in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Attivazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Guardare nella sezione **Input sensore**.

7. Selezionare il pulsante **Modifica**.



8. Selezionare il pulsante radio per il tasto da utilizzare come **Input sensore**.

9. Selezionare il pulsante **Ok** per confermare o il pulsante **Annulla** per annullare.

10. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.

11. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.3 Tastiera

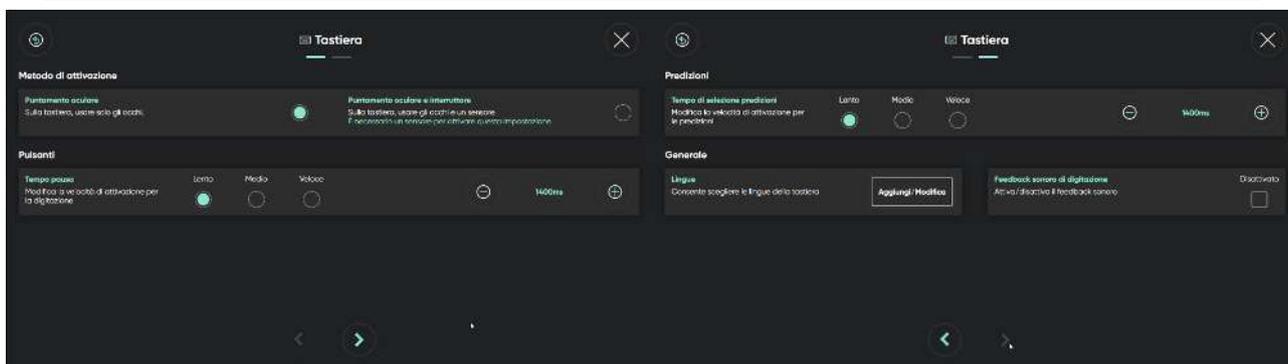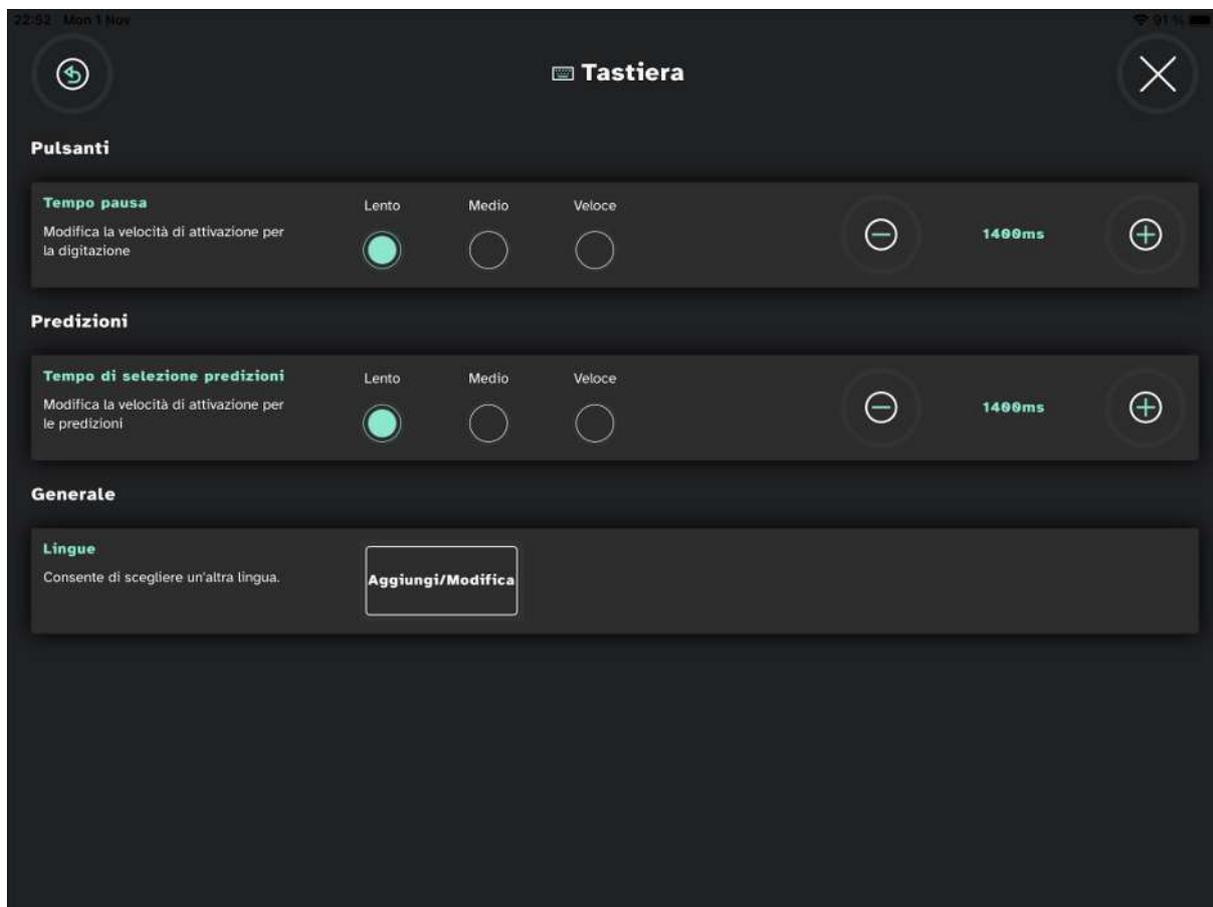

5.3.1 Metodo di attivazione

5.3.1.1 Come possono selezionare il mio Metodo di attivazione per la Tastiera in TD Talk?



La selezione del Metodo di attivazione per Tastiera si riferisce solo all'attivazione dei pulsanti della tastiera in TD Talk.

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.
4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Guardare nella sezione **Metodo di attivazione**.
7. Selezionare il pulsante radio per il **Metodo di attivazione** da utilizzare dai valori seguenti:
 - **Gaze** - Usare solo gli occhi (impostazione predefinita)
 - Puntamento oculare e sensore - Usare gli occhi e un sensore.

 È necessario un sensore per attivare questa impostazione.

8. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.
9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.3.2 Pulsanti

5.3.2.1 Come posso modificare il Tempo di selezione per i pulsanti della tastiera in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.
4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Guardare nella sezione **Pulsanti**.
7. Selezionare il pulsante di opzione **Tempo di selezione** scegliendo uno dei valori seguenti:
 - Lento
 - **Medio** (predefinito)
 - Veloce

8. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni di TD Talk.
9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni di TD Talk.

5.3.2.2 Come posso regolare il Tempo di selezione per l'attivazione dei pulsanti in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Guardare nella sezione **Pulsanti**.

7. Selezionare uno dei pulsanti di opzione seguenti per regolare il **Tempo di selezione**:

–  — per ridurre il Tempo di selezione

–  — per aumentare il Tempo di selezione

Il valore può essere modificato nell'intervallo 200 ms — infinito

8. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni di TD Talk.

9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni di TD Talk.

5.3.3 Predizione

5.3.3.1 Come posso modificare il Tempo di selezione per i pulsanti di predizione in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Selezionare il pulsante  (Pagina successiva) nella parte inferiore della schermata.

7. Selezionare la sezione **Predizione**.

8. Selezionare il pulsante di opzione **Tempo di selezione** scegliendo uno tra i seguenti valori:

- Lento
- **Medium** (impostazione predefinita)
- Veloce

9. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.

10. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.3.3.2 Come posso regolare il Tempo di selezione per i pulsanti di predizione in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.
4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Selezionare il pulsante  (Pagina successiva) nella parte inferiore della schermata.
7. Selezionare la sezione **Predizione**.
8. Selezionare uno dei pulsanti di opzione seguenti per regolare il **Tempo di selezione**:

–  — per ridurre il Tempo di selezione

–  — per aumentare il Tempo di selezione

Il valore può essere modificato nell'intervallo 200 ms — infinito

9. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.
10. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.3.4 Generale

5.3.4.1 Come posso aggiungere/scaricare una nuova lingua/lingua tastiera in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.
4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Selezionare il pulsante  (Pagina successiva) nella parte inferiore della schermata.
7. Selezionare la sezione **Generali**.
8. Selezionare il pulsante **Aggiungi/Cambia** in "Scegli lingua tastiera".
9. Selezionare la scheda **Scarica**.
10. Selezionare il pulsante  (Scarica) accanto alla lingua per avviare il download della nuova tastiera.

11. Selezionare il pulsante **Scarica** per avviare il download o **Annulla** per annullarlo.
12. Selezionare la scheda **Installato**.
13. Selezionare il pulsante di opzione accanto alle lingue per attivare la lingua.

14. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.

15. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.3.4.2 Come posso selezionare e attivare le lingue della tastiera da utilizzare/rendere disponibili in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Selezionare il pulsante  (Pagina successiva) nella parte inferiore della schermata.

7. Selezionare il pulsante **Aggiungi/Cambia** in "Scegli lingua tastiera".

8. Selezionare la scheda **Installato**.

9. Selezionare il pulsante di opzione accanto alle lingue per attivare la lingua della tastiera per tali lingue.



Assicurarsi di selezionare il pulsante di opzione per tutte le lingue per le quali si desidera avere una voce disponibile.

10. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.

11. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.3.4.3 Come posso attivare/disattivare il Feedback sonoro di digitazione in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Tastiera) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Selezionare il pulsante  (Pagina successiva) nella parte inferiore della schermata.


7. Selezionare la sezione **Generali**.

8. Portare il pulsante **Attivato/Disattivato** del "**Feedback sonoro di digitazione**" su:
- Attivato
 - Disattivato


9. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.

10. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.4 Conversazioni

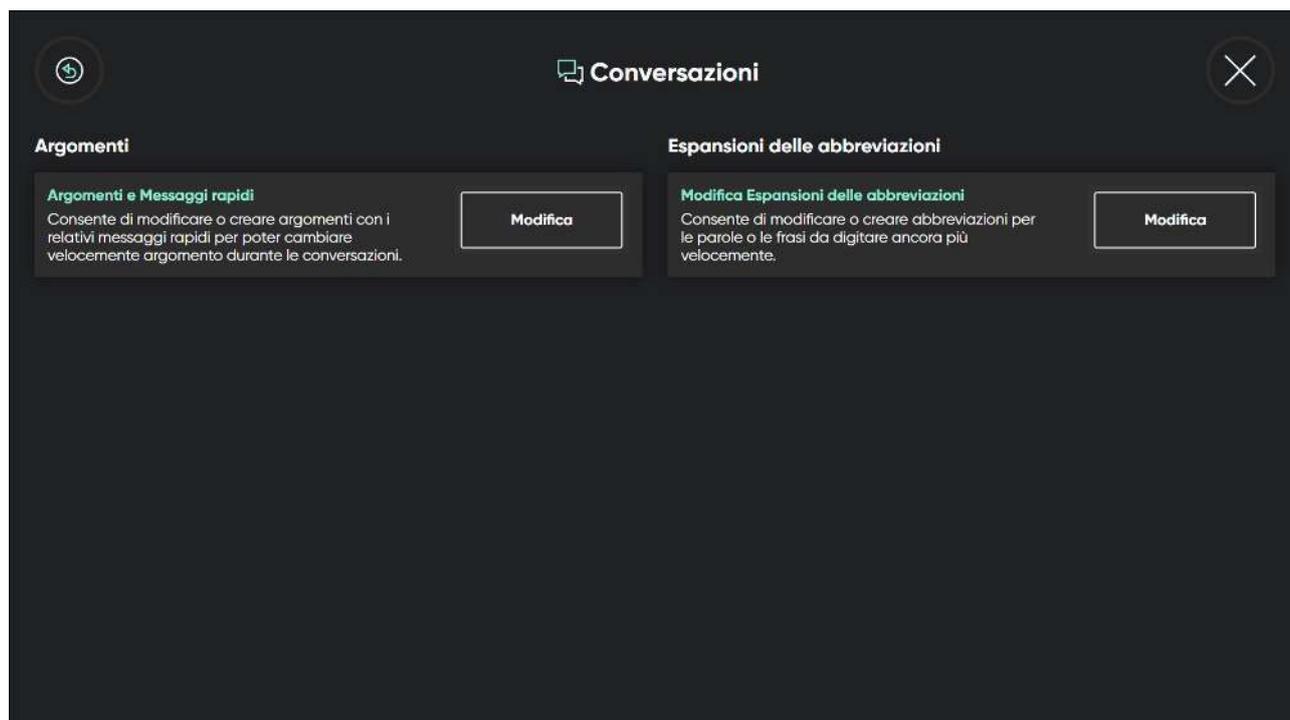

5.4.1 Argomenti

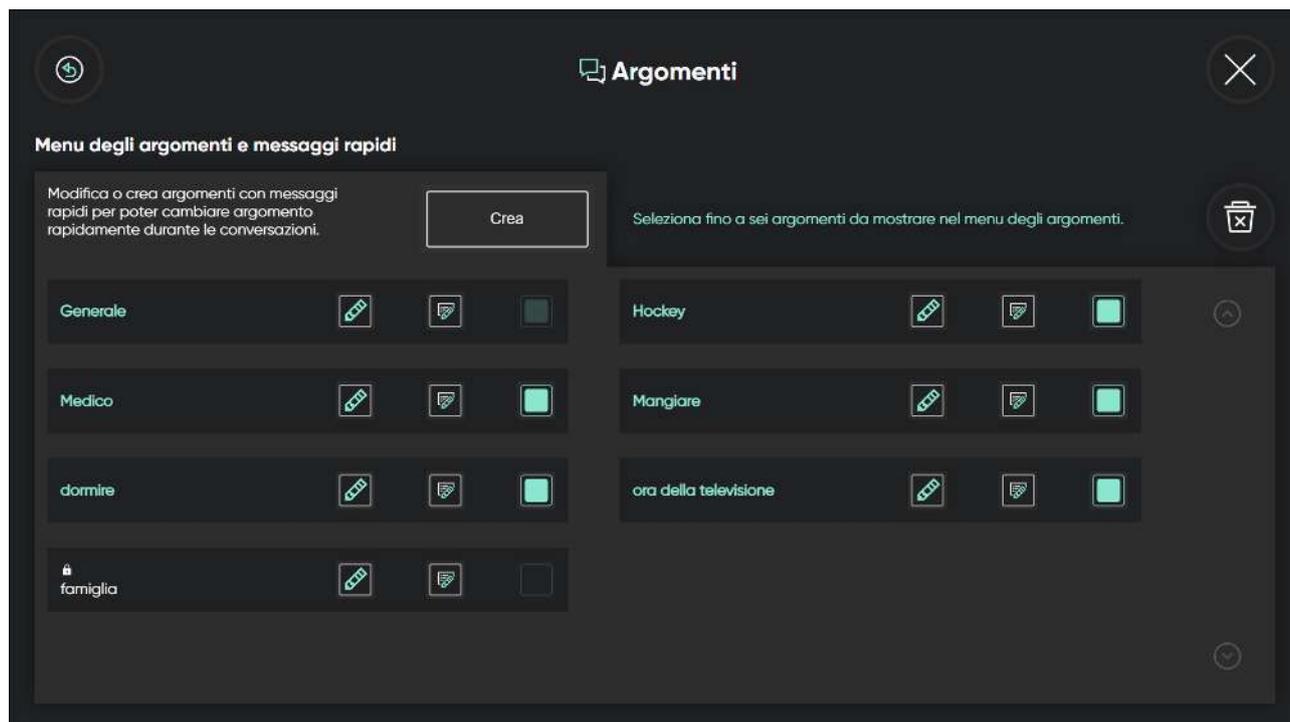

5.4.1.1 Come posso creare un nuovo argomento in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Attivazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Selezionare il pulsante **Crea**.
7. Utilizzare la tastiera per assegnare un nome al nuovo argomento.

 Selezionare la casella di controllo **Modalità Privacy** per disattivare la predizione delle frasi e l'apprendimento.

8. Selezionare l'icona  (Salva) per salvare.
9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire:

5.4.1.2 Come posso modificare il nome di un argomento in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
 3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.
 4. Cercare l'icona  (Attivazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.
 5. Selezionare il pulsante **Apri**.
 6. Selezionare il pulsante  (Modifica) accanto al nome dell'argomento.
 7. Utilizzare la tastiera per modificare il nome dell'argomento.
-  Selezionare la casella di controllo **Modalità Privacy** per disattivare la predizione delle frasi e l'apprendimento.
8. Selezionare l'icona  (Salva) per salvare.
 9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire:

5.4.1.3 Come posso creare un argomento privato in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.
4. Cercare l'icona  (Attivazione) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Selezionare il pulsante  (Modifica) accanto al nome dell'argomento.
7. Selezionare la casella di controllo **Modalità Privacy** per disattivare la predizione delle frasi e l'apprendimento.
8. Selezionare l'icona  (Salva) per salvare.
9. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire:

5.4.1.4 Come posso selezionare gli argomenti attivi in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Conversazioni) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Selezionare il pulsante **Modifica** per gli Argomenti e i Messaggi rapidi nella sezione Argomenti.
7. Selezionare la **Casella di controllo** dell'argomento da rendere attivo.

 Nel menu degli argomenti, è possibile selezionare e rendere disponibili fino a sei (6) argomenti.

8. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire dalla schermata di modifica.
9. Selezionare il pulsante  (Tastiera) per tornare alla schermata iniziale.

5.4.1.5 Come posso eliminare un argomento in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.
4. Cercare l'icona  (Conversazioni) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Selezionare il pulsante **Modifica** per gli Argomenti e i Messaggi rapidi nella sezione Argomenti.
7. Selezionare il pulsante  (Elimina).
8. Selezionare il pulsante  (Elimina) accanto al nome dell'argomento che si desidera eliminare.
9. Selezionare il pulsante **Elimina** per eliminare l'argomento o il pulsante **Annulla** per annullare.
10. Selezionare il pulsante  (Fine) una volta terminata l'eliminazione.
11. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire dalla schermata di modifica.
12. Selezionare il pulsante  (Tastiera) per tornare alla schermata iniziale.

5.4.1.6 Come posso modificare i Messaggi rapidi in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Conversazioni) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Selezionare il pulsante **Modifica** per gli Argomenti e i Messaggi rapidi nella sezione Argomenti.
7. Selezionare il pulsante  (Modifica messaggi rapidi).
8. Selezionare il pulsante  (Modifica) accanto al messaggio da modificare.
9. Apportare le modifiche al messaggio con la tastiera.
10. Selezionare il pulsante  (Salva) per salvare le modifiche apportate al Messaggio rapido.
11. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire dalla schermata di modifica.
12. Selezionare il pulsante  (Tastiera) per tornare alla schermata iniziale.

5.4.1.7 Come posso aggiungere un Messaggio rapido in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.
4. Cercare l'icona  (Conversazioni) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Selezionare il pulsante **Modifica** per gli Argomenti e i Messaggi rapidi nella sezione Argomenti.
7. Selezionare il pulsante  (Modifica messaggi rapidi).
8. Selezionare il pulsante  (Aggiungi) accanto ad Aggiungi Nuovo.
Per ciascun argomento, è possibile avere fino a tre (3) pagine di Messaggi rapidi.

Utilizzare i pulsanti  e  per passare da una pagina all'altra.

9. Scrivere il nuovo messaggio con la tastiera.
10. Selezionare il pulsante  (Salva) per salvare il nuovo Messaggio rapido.
11. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire dalla schermata di modifica.
12. Selezionare il pulsante  (Tastiera) per tornare alla schermata iniziale.

5.4.1.8 Come posso eliminare un Messaggio rapido in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Conversazioni) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Selezionare il pulsante **Modifica** per gli Argomenti e i Messaggi rapidi nella sezione Argomenti.

7. Selezionare il pulsante  (Modifica messaggi rapidi).

8. Selezionare il pulsante  (Modifica) accanto al messaggio da eliminare.


9. Selezionare il pulsante  (Elimina messaggio).

10. Selezionare il pulsante  (Salva) per salvare le modifiche apportate al Messaggio rapido.

11. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire dalla schermata di modifica.

12. Selezionare il pulsante  (Tastiera) per tornare alla schermata iniziale.

5.4.2 Espansione abbreviazioni

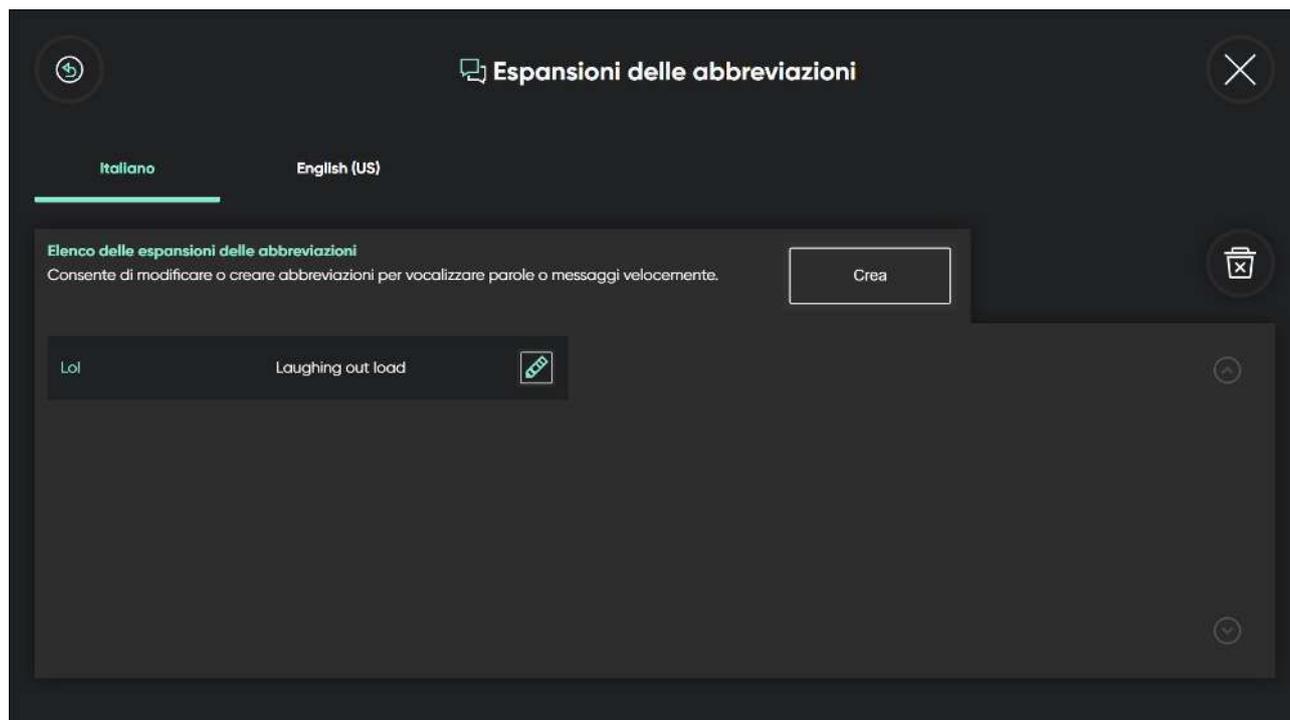

5.4.2.1 Come posso aggiungere un'espansione delle abbreviazioni in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.
4. Cercare l'icona  (Conversazioni) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Selezionare il pulsante **Modifica** nell'area Modifica Espansione abbreviazioni in Espansione abbreviazioni.
7. Selezionare la scheda **lingua** per la lingua installata per la quale si desidera aggiungere un'espansione abbreviazioni.
8. Selezionare il pulsante **Crea**.
9. Scrivere nella casella di testo **Abbreviazione** l'abbreviazione che si desidera creare.
10. Selezionare l'icona  accanto alla casella di testo **Parola o messaggio**.
11. Scrivere nella casella di testo **Parola o messaggio** la parola o il messaggio per cui è stata creata l'abbreviazione.
12. Selezionare il pulsante  (Salva) per salvare le modifiche apportate all'Espansione abbreviazioni.
13. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni Conversazioni.

14. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni di TD Talk.

15. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.4.2.2 Come posso modificare un'espansione delle abbreviazioni in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Conversazioni) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Selezionare il pulsante **Modifica** nell'area Modifica Espansione abbreviazioni in Espansione abbreviazioni.

7. Selezionare la scheda **lingua** per la lingua installata per la quale si desidera modificare un'espansione abbreviazioni.

8. Selezionare l'icona  accanto all'abbreviazione che si desidera modificare.

9. Modificare nella casella di testo **Abbreviazione** la nuova abbreviazione che si desidera creare.

10. Selezionare l'icona  accanto alla casella di testo **Parola o messaggio**.

11. Modificare nella casella di testo **Parola o messaggio** la nuova parola o il nuovo messaggio per cui è stata creata l'abbreviazione.

12. Selezionare il pulsante  (Salva) per salvare le modifiche apportate all'Espansione abbreviazioni.

13. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni Conversazioni.

14. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni di TD Talk.

15. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.4.2.3 Come posso eliminare un'espansione delle abbreviazioni in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.


2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Conversazioni) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Selezionare il pulsante **Modifica** nell'area Modifica Espansione abbreviazioni in Espansione abbreviazioni.
7. Selezionare la scheda **lingua** per la lingua installata per la quale si desidera eliminare un'espansione abbreviazioni.
8. Selezionare il pulsante  (Elimina).
9. Selezionare il pulsante  (Elimina) accanto all'abbreviazione che si desidera eliminare.
10. Selezionare il pulsante **Elimina** per confermare o il pulsante **Annulla** per annullare, eliminando l'abbreviazione.
11. Selezionare il pulsante  (Fine) una volta terminata l'eliminazione.
12. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni Conversazioni.
13. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni di TD Talk.
14. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.5 Voce

Impostare la sintesi vocale delle lingue della tastiera qui

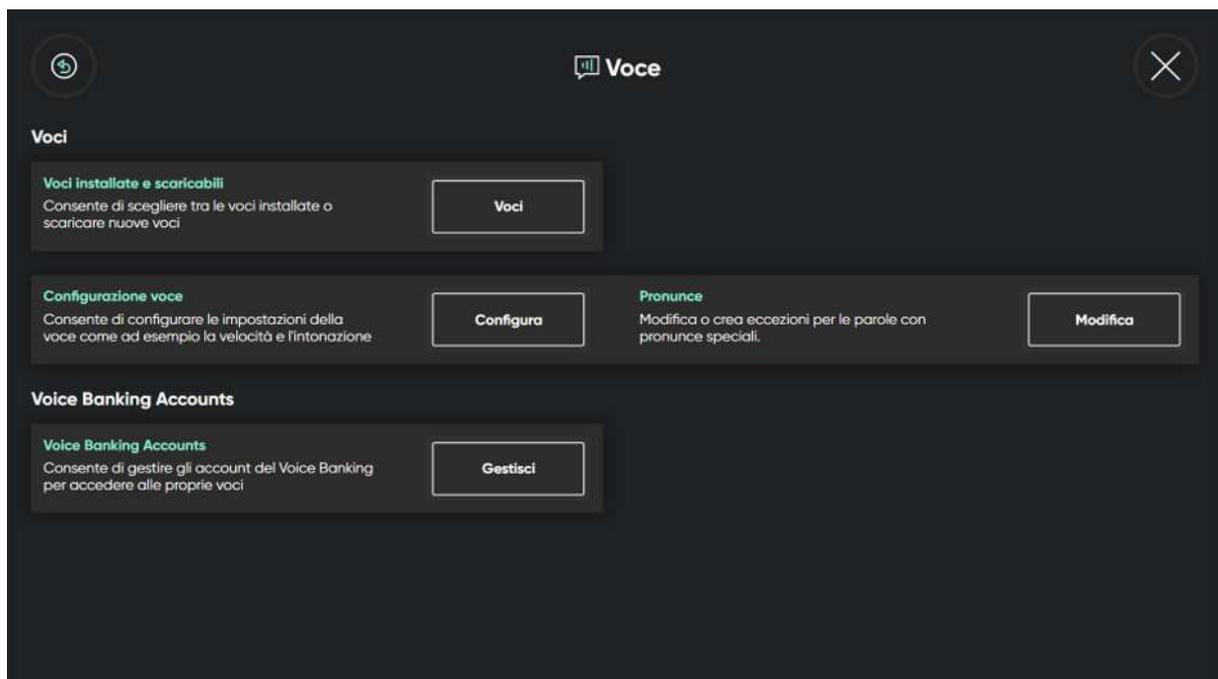

Tutte le lingue installate sono visualizzate nella parte superiore della schermata. Quando la lingua è stata selezionata, le voci disponibili per tale lingua vengono visualizzate nell'elenco sotto alle lingue. Per provare una voce, selezionare



accanto alla voce, se disponibile.

5.5.1 Voci

5.5.1.1 Voci installate e scaricabili

There are a lot of voices available within TD Talk, especially for some languages.

Filters can be applied to make it easier for the user to find their voice. For more information, see [5.5.1.1.3 Come posso applicare un Filtro alle Voci disponibili in TD Talk?, pagina 41](#)

5.5.1.1.1 Come posso scaricare una nuova voce in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Voce) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Guardare nella sezione **Voci**

7. Selezionare il pulsante **Voci** per le voci installate e scaricabili.

8. Selezionare la scheda **Scarica**.

9. Selezionare la scheda **lingua** per la lingua installata che si desidera usare.



Se la lingua desiderata non è presente, vedere [5.3.4.1 Come posso aggiungere/scaricare una nuova lingua/lingua tastiera in TD Talk?, pagina 29](#) e [5.3.4.2 Come posso selezionare e attivare le lingue della tastiera da utilizzare/rendere disponibili in TD Talk?, pagina 30](#).

10. Selezionare il pulsante  (Scarica) accanto alla voce per avviare il download della nuova voce. Usare i pulsanti "Scorri su" e "Scorri giù" a destra per scorrere l'elenco delle voci disponibili per la lingua desiderata.



Per provare una voce, selezionare  accanto alla voce,

11. Selezionare il pulsante **Scarica** per avviare il download o **Annulla** per annullarlo.

12. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni Voce.

13. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni di TD Talk.

14. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.5.1.1.2 Come posso selezionare la mia voce in TD Talk?

 Le voci del sistema Voice Banking non avranno il logo del servizio Voice Banking visibile dopo il nome della voce.

- Acapela MyOwnVoice 
- ModelTalker 
- The Voice Keeper 

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Voce) per individuare la scheda impostazioni corretta.

5. Selezionare il pulsante **Apri**.

6. Guardare nella sezione **Voci**

7. Selezionare il pulsante **Voci** per le voci installate e scaricabili.

8. Selezionare la scheda **lingua** per la lingua installata che si desidera usare.

 Se la lingua desiderata non è presente, vedere [5.3.4.1 Come posso aggiungere/scaricare una nuova lingua/lingua tastiera in TD Talk?](#), pagina 29 e [5.3.4.2 Come posso selezionare e attivare le lingue della tastiera da utilizzare/rendere disponibili in TD Talk?](#), pagina 30.

9. Selezionare la voce da usare nell'elenco delle voci disponibili per la lingua da utilizzare.

Usare i pulsanti "Scorri su" e "Scorri giù" a destra per scorrere l'elenco delle voci disponibili per la lingua desiderata.

 Per provare una voce, selezionare  accanto alla voce,

10. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni Voce.

11. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni di TD Talk.

12. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.5.1.1.3 Come posso applicare un Filtro alle Voci disponibili in TD Talk?


On the **Installed** or **Download** tab, do the following:

1. Selezionare il pulsante  (Filtro).
2. Selezionare le caselle di controllo accanto alle opzioni che si desidera utilizzare.

È possibile scegliere:

- Genere - Femmina, Maschio
- Età - Bambino, Adolescente e Adulto

5.5.1.2 Configurazione voce

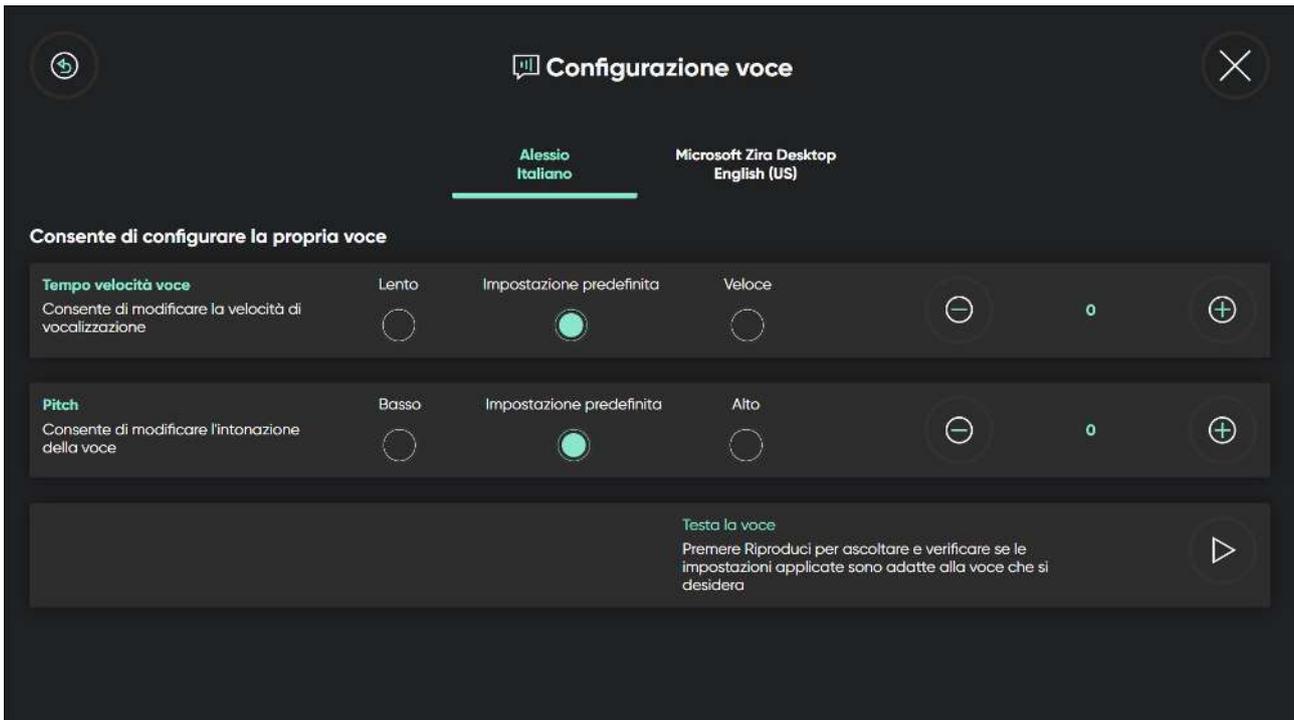

5.5.1.2.1 Come posso modificare la mia voce in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.
4. Cercare l'icona  (Voce) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Guardare nella sezione **Voci**
7. Selezionare il pulsante **Configura** per la configurazione della voce.
8. Selezionare la voce da modificare tra le voci disponibili.
9. Selezionare il pulsante di opzione **Velocità voce** scegliendo uno dei valori seguenti:
 - Lento
 - **Impostazione predefinita**
 - Veloceper modificare la velocità di vocalizzazione.
10. Selezionare uno dei pulsanti di opzione seguenti per regolare la **Velocità voce**:
 -  — per ridurre la Velocità voce
 -  — per aumentare la Velocità voceIl valore può essere modificato nell'intervallo -10 — +10.
11. Selezionare il pulsante di opzione per l'**Intonazione** scegliendo uno tra i seguenti valori:

- Basso
- **Impostazione predefinita**
- Alto

per modificare l'intonazione di vocalizzazione.



Per ascoltare la nuova voce, selezionare  nella sezione Testa la voce.

12. Selezionare uno dei pulsanti di opzione seguenti per regolare l'**Intonazione**:

-  — per abbassare l'intonazione

-  — per aumentare l'intonazione

Il valore può essere modificato nell'intervallo -10 — +10.




Per ascoltare la nuova voce, selezionare  nella sezione Testa la voce.

13. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni Voce.

14. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni di TD Talk.

15. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.5.1.3 Pronunce

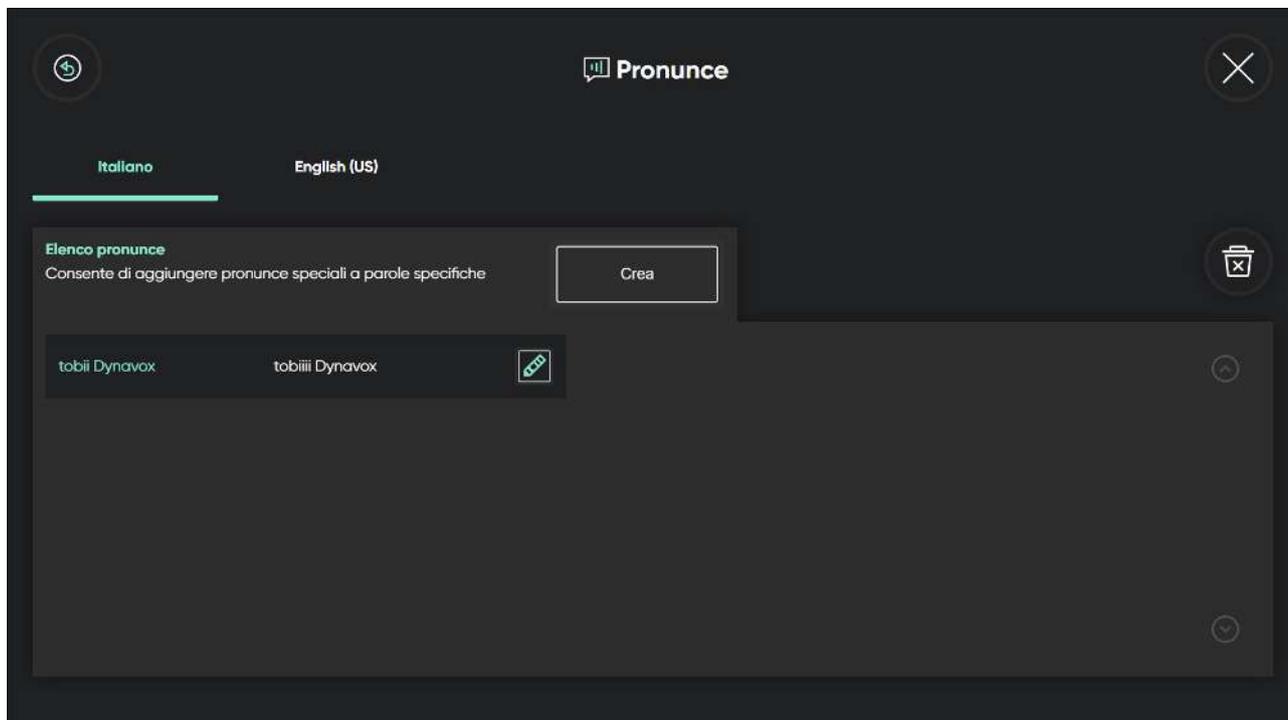

5.5.1.3.1 Come posso di creare eccezioni di pronuncia in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.
4. Cercare l'icona  (Voce) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Guardare nella sezione **Voci**
7. Selezionare il pulsante **Crea** per le pronunce..
8. Selezionare la scheda **lingua** per la lingua installata per la quale si desidera creare un'eccezione di pronuncia.
9. Selezionare il pulsante **Crea**.
10. Scrivere nella casella di testo **Parola** la parola per la quale si desidera creare un'eccezione di pronuncia.
11. Selezionare l'icona  accanto alla casella di testo **Pronuncia**.
12. Scrivere nella casella di testo **Pronuncia** come si desidera pronunciare la parola.
13. Per ascoltare l'eccezione di pronuncia, selezionare  accanto alla casella di testo Pronuncia.
14. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni Voce.
15. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni di TD Talk.
16. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.5.2 Voice Banking Accounts

TD Talk può collegarsi a tre diversi servizi Voice Banking:

- Acapela MyOwnVoice 
- ModelTalker 
- The Voice Keeper 

Per poter collegare e utilizzare la voce sintetizzata personale, l'utente avrà bisogno di un account con le credenziali di accesso per uno di questi fornitori di servizio Voice Banking.

5.5.2.1 Voice Banking Accounts

5.5.2.1.1 Come posso utilizzare la mia voce dal mio servizio Voice Banking?


 Per accedere al servizio Voice Banking è necessario un accesso a Internet.

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.
4. Cercare l'icona  (Voce) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Guardare nella sezione **Voice Banking Accounts**.
Selezionare il pulsante **Gestisci** per Voice Banking Accounts.
7. Selezionare il pulsante **Accedi** nella sezione del servizio Voice Banking.
8. Immettere **Nome utente e Password**.
9. Selezionare il pulsante **Accedi**.

La voce personale sarà scaricata e selezionata automaticamente come voce predefinita dell'utente.

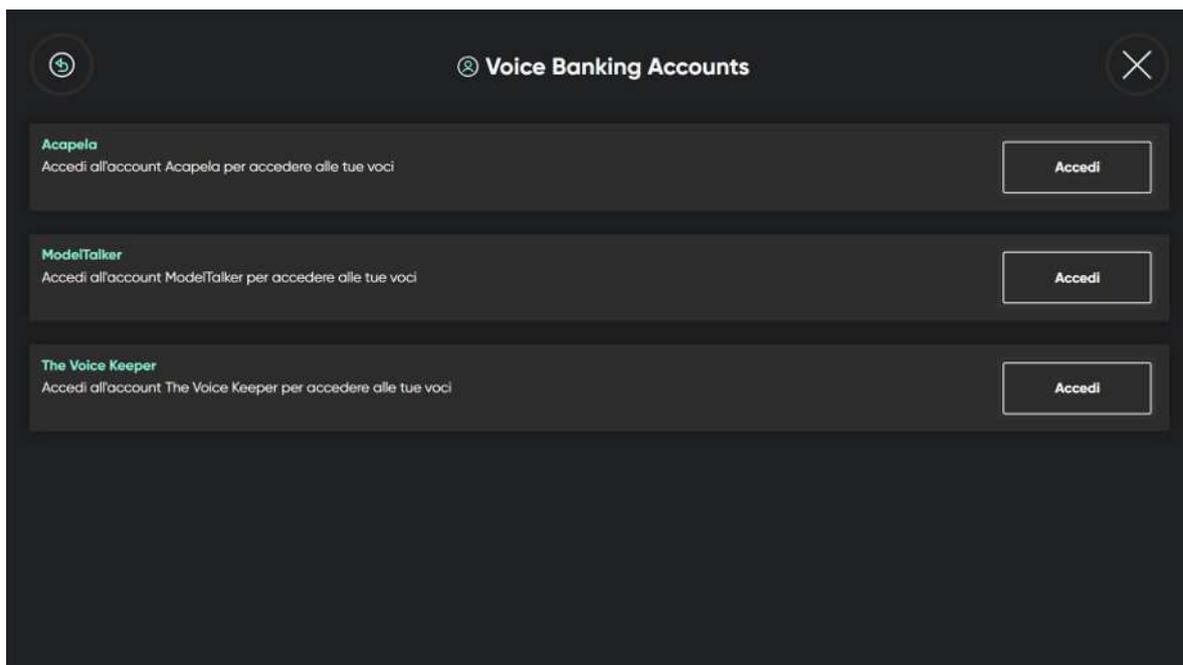


 Questo succederà quando sono disponibili voci sintetizzate personali in più lingue.

10. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni Voce.
11. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni di TD Talk.
12. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.6 Dispositivo



Disponibile solo su TD Pilot.

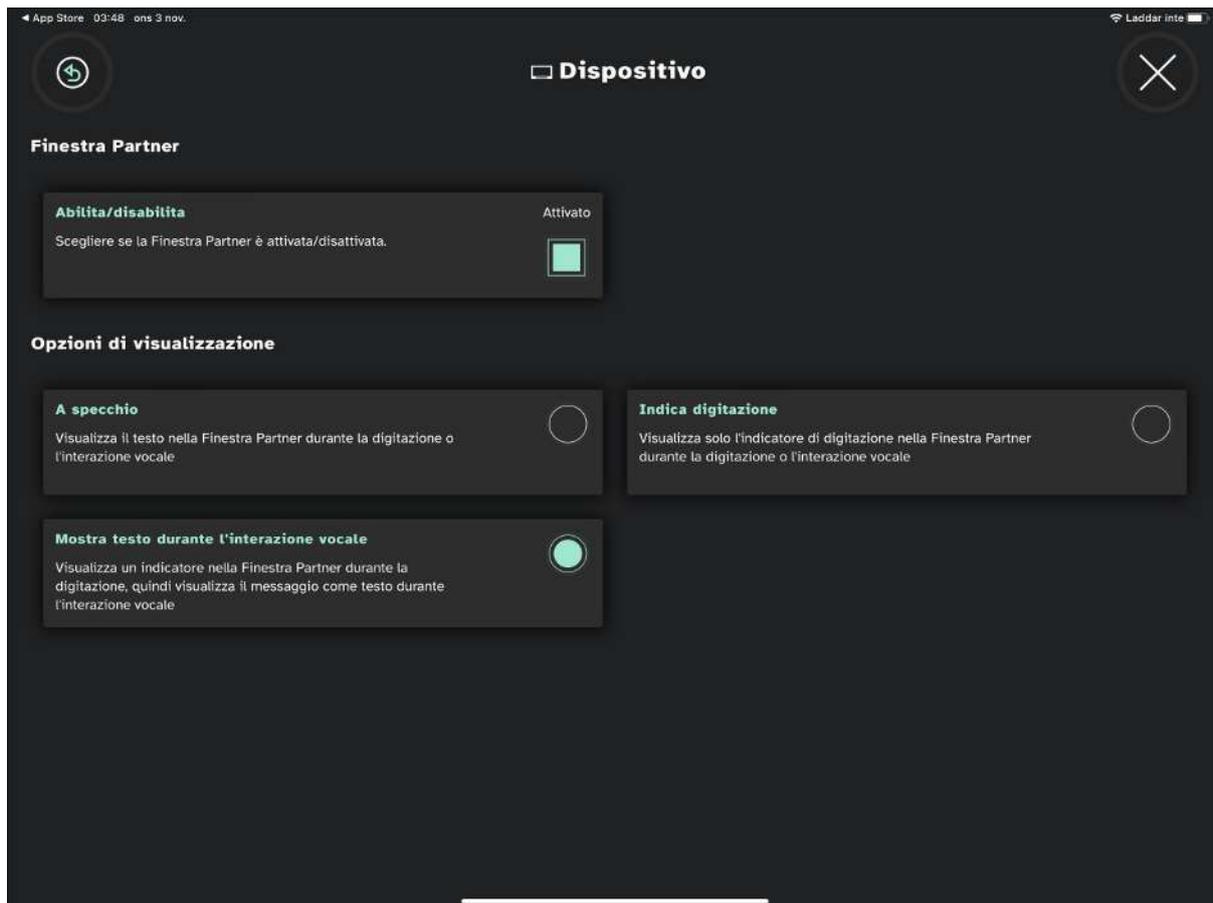

5.6.1 Finestra Partner

5.6.1.1 Come posso abilitare/disabilitare la Finestra Partner in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.

4. Cercare l'icona  (Dispositivo) per individuare la scheda impostazioni corretta.
5. Selezionare il pulsante **Apri**.
6. Guardare nella sezione **Finestra Partner**.
7. Impostare il pulsante **Abilita/Disabilita** per "**Scegli se attivare/disattivare la Finestra Partner**" su:

- Attivato
- Disattivato

- Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni di TD Talk.
- Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni di TD Talk.

5.6.1.2 Come posso impostare le opzioni di visualizzazione della Finestra Partner in TD Talk?

- Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

- Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
- Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni di TD Talk.
- Cercare l'icona  (Dispositivo) per individuare la scheda impostazioni corretta.
- Selezionare il pulsante **Apri**.
- Guardare nella sezione **Opzioni di visualizzazione**.
- Selezionare uno dei seguenti pulsanti di opzione per scegliere l'opzione di visualizzazione della Partner Window:
 - A specchio — Visualizza il testo nella Partner Window durante la digitazione o l'interazione vocale.
 - Mostra testo durante l'interazione vocale — Visualizza un indicatore nella Partner Window durante la digitazione, quindi visualizza il messaggio come testo durante l'interazione vocale.
 - Indica digitazione — Visualizza solo l'indicatore di digitazione nella Partner Window durante la digitazione o l'interazione vocale.

- Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni di TD Talk.
- Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni di TD Talk.

5.7 Generale

5.7.1 Lingua applicazione

5.7.1.1 Come posso impostare la mia lingua dell'applicazione in TD Talk?

- Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

- Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
- Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.
- Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.

5. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
6. Cercare l'icona  (Generali) per individuare la scheda impostazioni corretta.
7. Selezionare il pulsante **Apri**.
8. Guardare nella sezione **Lingua applicazione**.
9. Selezionare il pulsante **Modifica**.
10. Selezionare il pulsante di opzione accanto alla lingua desiderata per l'applicazione.
11. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.
12. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.7.2 Dimensione testo

5.7.2.1 Come posso modificare la dimensione testo in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.
4. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
5. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
6. Cercare l'icona  (Generali) per individuare la scheda impostazioni corretta.
7. Selezionare il pulsante **Apri**.
8. Guardare nella sezione **Dimensione testo**.
9. Selezionare il pulsante di opzione **Dimensione testo** scegliendo uno dei valori seguenti:
 - **Predefinito** (impostazione predefinita)
 - Grande
10. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.
11. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.7.3 Feedback

5.7.3.1 Come posso inviare il feedback a Tobii Dynavox in TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.
4. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
5. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
6. Cercare l'icona  (Generali) per individuare la scheda impostazioni corretta.
7. Selezionare il pulsante **Apri**.
8. Guardare nella sezione **Feedback**.
9. Selezionare il pulsante **Feedback**.
10. Utilizzare la **Tastiera** per digitare il proprio indirizzo e-mail.
11. Selezionare il pulsante  per il campo di testo Oggetto.
12. Utilizzare la **Tastiera** inserire l'oggetto dell'e-mail.
13. Selezionare il pulsante  per il campo di testo Messaggio.
14. Utilizzare la **Tastiera** per inviare messaggi.
15. Selezionare il pulsante  per chiudere il campo di testo Messaggio.
16. Selezionare il pulsante **Invia feedback** per inviare il feedback a Tobii Dynavox.
17. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.
18. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.7.4 Termini di servizio e Informativa sulla privacy

5.7.4.1 Come posso aprire i Termini di servizio

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.
3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.
4. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
5. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
6. Cercare l'icona  (Generali) per individuare la scheda impostazioni corretta.
7. Selezionare il pulsante **Apri**.

8. Rivedere la sezione **Termini di servizio e Informativa sulla privacy**.
9. Selezionare il pulsante **Apri**.

10. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.

11. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.7.4.2 Come posso aprire l'Informativa sulla privacy

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.

4. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.

5. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.

6. Cercare l'icona  (Generali) per individuare la scheda impostazioni corretta.

7. Selezionare il pulsante **Apri**.

8. Rivedere la sezione **Termini di servizio e Informativa sulla privacy**.

9. Selezionare il pulsante **Apri**.

10. Selezionare il pulsante  (Avanti).

11. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.

12. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

5.7.5 Raccogli registri

5.7.5.1 Come posso raccogliere i log per TD Talk?

1. Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

Il pulsante  (Dashboard) diventerà visibile nella parte inferiore centrale dello schermo.

2. Selezionare il pulsante  (Dashboard) per aprire Dashboard.

3. Selezionare l'azione  (Impostazioni) per aprire le Impostazioni TD Talk.

4. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.

5. Selezionare il pulsante  (Schermata successiva) sul lato destro.
6. Cercare l'icona  (Generali) per individuare la scheda impostazioni corretta.
7. Selezionare il pulsante **Apri**.
Si aprirà la pagina delle impostazioni per Generale.
8. Guardare nella sezione **Raccogli registri**.
9. Selezionare il pulsante **Registro**.
10. Selezionare il pulsante **Sì**.



I registri saranno creati sul desktop.

11. Selezionare il pulsante  (Indietro) per tornare a Impostazioni TD Talk.
12. Selezionare il pulsante  (Chiudi) per uscire da Impostazioni TD Talk.

Supporto per il dispositivo Tobii Dynavox

Informazioni disponibili online

Visitare la pagina del supporto specifica del prodotto per il dispositivo Tobii Dynavox in uso. Tale pagina include informazioni aggiornate sui problemi riscontrati, oltre a suggerimenti utili correlati al prodotto.

Le pagine del supporto sono disponibili agli indirizzi: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Contatta il Consulente per la tua soluzione o il Rivenditore

Per domande o problemi relativi al prodotto, rivolgersi al consulente per la soluzione o al rivenditore autorizzato Tobii Dynavox. Gli operatori conoscono la configurazione personale dei clienti e possono offrire suggerimenti e informazioni mirate. Per i recapiti, visitare la pagina all'indirizzo <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.