

TD Talk

Brukerhåndbok



Brukerhåndbok TD Talk

Versjon 1.8

2025-07-08

Med enerett.

Opphavsrett © Dynavox Group AB (publ)

Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres, lagres i en database eller deles i noen form eller på noen måte (elektronisk, ved fotokopiering, innspilling eller annet) uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.

Den angitte opphavsretten inkluderer ethvert format og alle deler av det opphavsrettslig beskyttede materialet, og informasjon som måtte være tillatt under nåværende gjeldende lov eller heretter vedtatt, inkludert, men ikke begrenset til, materiale som er basert på programvare som vises på skjermen, som skjermbilder, menyer, etc.

Informasjonen i dette dokumentet tilhører Dynavox Group AB. Det er forbudt å gjengi deler av eller hele innholdet uten skriftlig forhåndstillatelse fra Dynavox Group AB.

Produkter som refereres til i dette dokumentet kan være varemerker og/eller registrerte varemerker. Utgiver og forfatter har ikke krav på disse varemerkene.

Alle forholdsregler er tatt ved utarbeidelse av dette dokumentet, og utgiver og forfatter tar ikke ansvar for feil eller mangler, eller for skader som oppstår som resultat av bruk av informasjon i dette dokumentet, eller av bruk av programmer som eventuelt følger med. Utgiver og forfatter skal på ingen måte holdes ansvarlig for profittap eller andre kommersielle skader som oppstår eller påstås å oppstå direkte eller indirekte på grunn av dette dokumentet.

Innholdet kan endres uten varsel.

Se nettstedet til Tobii Dynavox.

www.TobiiDynavox.com for oppdaterte versjoner av dette dokumentet.

Kontaktinformasjon:

Dynavox Group AB
Löjtnantsgatan 25
115 50 Stockholm
Sverige

+46 8 522 950 20

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
Storbritannia

+44 (0)114 481 00 11

Tobii Dynavox Pty. Ltd.
Trading as Link Assistive
11B MAB Eastern Promenade
Tonsley SA, 5042
Australia

+61 8 7120 6002

Tobii Dynavox (Suzhou) Co. Ltd
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP,
Suzhou
P.R.China 215021

+86 512 69362880




Innholdsfortegnelse

1	Velkommen	6
1.1	Systemkrav	6
1.2	Støttede språk.....	6
1.3	Slik skaffer du deg TD Suite	6
2	Ressurser og støtte.....	7
2.1	Nettressurser og støtte	7
2.2	Opplæring	7
3	Kom i gang.....	8
3.1	Oversikt over TD Talk	8
3.2	Meny utenfor skjermen	9
3.2.1	Hvordan får jeg tilgang til menyen utenfor skjermen i TD Talk?	9
3.3	Kontrollpanelet.....	10
3.3.1	Hvordan får jeg tilgang til kontrollpanelet i TD Talk?.....	10
3.3.2	Hvordan avslutter og lukker jeg TD Talk?	10
3.4	Oppsett av TD Talk	11
4	Slik bruker du TD Talk.....	13
4.1	Slik bruker du tastaturet	13
4.2	Slik bruker du prediksjon.....	13
4.2.1	Ordprediksjon.....	13
4.2.2	Setningsprediksjon	14
4.3	Redigere en melding.....	14
4.3.1	Hvordan redigerer jeg en melding i TD Talk?	14
4.4	Kopier og lim inn	15
4.4.1	Hvordan bruker jeg Kopier i TD Talk?.....	15
4.4.2	Hvordan bruker jeg Lim inn i TD Talk?.....	15
4.5	Bruke hurtigmeldinger.....	15
4.5.1	Hvordan bruker jeg hurtigmeldinger i TD Talk?	15
4.5.2	Hvordan endrer jeg tema for hurtigmeldinger?	16
4.6	Endre språket.....	17
4.6.1	Hvordan bytter jeg språk i TD Talk?.....	17
4.7	Chat	17
4.8	Se gjennom-modus.....	18
4.8.1	Hvordan starter jeg Se gjennom-modus	18
4.8.2	Hvordan avslutter jeg Se gjennom-modus	18
4.9	Hvordan bruker jeg utvidelse av forkortelser i TD Talk?	18
4.10	Hvordan angrer jeg en handling i TD Phone?.....	19
5	Innstillinger for TD Talk	20
5.1	Min konto	21
5.1.1	Hva er en myTobiiDynavox-konto?	21
5.1.2	Hvordan oppretter jeg en myTobiiDynavox-konto?.....	21
5.1.3	Hvordan sikkerhetskopierer jeg personlige data?	21
5.1.4	Hvordan gjenoppretter jeg personlige data?	22

5.2	Aktivering	22
5.2.1	Aktiveringsmetode.....	23
5.2.1.1	Hvordan velger jeg aktiveringsmetode i TD Talk?.....	23
5.2.2	Knapper.....	24
5.2.2.1	Hvordan endrer jeg dweetid for aktiveringsknapper i TD Talk?	24
5.2.2.2	Hvordan finjusterer jeg dweetid for aktiveringsknapper i TD Talk? ..	24
5.2.3	Brytertilgang	25
5.2.3.1	Hvordan stiller jeg inn brytertilgang for bryteren min i TD Talk?	25
5.3	Tastatur	26
5.3.1	Aktiveringsmetode.....	26
5.3.1.1	Hvordan velger jeg aktiveringsmetode for tastaturet i TD Talk?	26
5.3.2	Knapper.....	27
5.3.2.1	Hvordan endrer jeg dweetid for tastaturknapper i TD Talk?.....	27
5.3.2.2	Hvordan finjusterer jeg dweetid for aktiveringsknapper i TD Talk? ..	27
5.3.3	Ordprediksjon	28
5.3.3.1	Hvordan endrer jeg dweetid for prediksjonsknapper i TD Talk?	28
5.3.3.2	Hvordan finjusterer jeg dweetid for prediksjonsknapper i TD Talk? ..	29
5.3.4	Generelt	29
5.3.4.1	Hvordan legger jeg til / laster ned et nytt språk/tastaturspråk i TD Talk?	29
5.3.4.2	Hvordan velger og aktiverer jeg tastaturspråk som skal brukes / være tilgjengelige i TD Talk?.....	30
5.3.4.3	Hvordan slår jeg på/av type lydtilbakemelding i TD Talk?.....	30
5.4	Samtaler.....	31
5.4.1	Tema	32
5.4.1.1	Hvordan oppretter jeg et nytt tema i TD Talk?	32
5.4.1.2	Hvordan skifter jeg navn på et tema i TD Talk?	32
5.4.1.3	Hvordan gjør jeg temaet privat i TD Talk?.....	33
5.4.1.4	Hvordan velger jeg aktive teamer i TD Talk?	33
5.4.1.5	Hvordan sletter jeg et tema i TD Talk?.....	34
5.4.1.6	Hvordan redigerer jeg hurtigmeldinger i TD Talk?	34
5.4.1.7	Hvordan legger jeg til en hurtigmelding i TD Talk?	35
5.4.1.8	Hvordan sletter jeg en hurtigmelding i TD Talk?	36
5.4.2	Utvidelse av forkortelser.....	37
5.4.2.1	Hvordan legger jeg til en utvidelse av forkortelser i TD Talk?	37
5.4.2.2	Hvordan redigerer jeg en utvidelse av forkortelser i TD Talk?	38
5.4.2.3	Hvordan sletter jeg en utvidelse av forkortelser i TD Talk?	38
5.5	Stemme	39
5.5.1	Stemmer.....	40
5.5.1.1	Installerte og nedlastbare stemmer.....	40
5.5.1.1.1	Hvordan laster jeg ned en ny stemme i TD Talk?	40
5.5.1.1.2	Hvordan velger jeg stemmen min i TD Talk?	41
5.5.1.1.3	Hvordan bruker jeg et filter for tilgjengelige stemmer i TD Talk?	41
5.5.1.2	Stemmekonfigurering	42
5.5.1.2.1	Hvordan gjør endringer på stemmen min i TD Talk? ..	42
5.5.1.3	Uttaler.....	43
5.5.1.3.1	Hvordan oppretter jeg uttaleunntak i TD Talk?.....	43
5.5.2	Kontoer for Voice Banking	44
5.5.2.1	Kontoer for Voice Banking.....	44
5.5.2.1.1	Hvordan bruker jeg stemmen min fra Voice Banking-tjenester?.....	44
5.6	Enhet	46
5.6.1	Partnervindu.....	46
5.6.1.1	Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg partnervinduet i TD Talk?	46

	5.6.1.2	Hvordan angir jeg visningsalternativene for partnervinduet i TD Talk?	47
5.7	Generelt		47
	5.7.1	Programspråk.....	47
	5.7.1.1	Hvordan angir jeg programspråk i TD Talk?	47
	5.7.2	Tekststørrelse	48
	5.7.2.1	Hvordan endrer jeg tekststørrelse i TD Talk?.....	48
	5.7.3	Respons:	48
	5.7.3.1	Hvordan sender jeg tilbakemelding til Tobii Dynavox i TD Talk?	48
	5.7.4	Vilkår for bruk og personvernerklæring	49
	5.7.4.1	Hvordan åpner man Tjenestevilkår	49
	5.7.4.2	Hvordan åpner man personvernerklæringen.....	50
	5.7.5	Innhent logger	50
	5.7.5.1	Hvordan samler jeg logger for TD Talk?	50

1 Velkommen

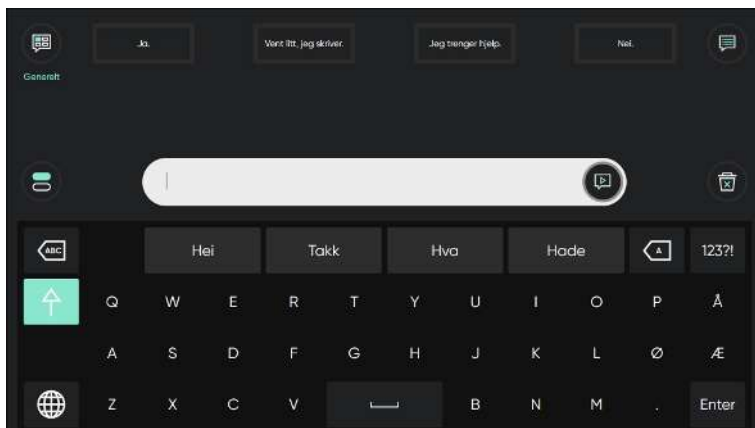

Illustrasjon 1: TD Talk

TD Talk gir folk mulighet til å formidle hvem de er og hva de ønsker å uttrykke, på en mest mulig effektiv måte. Det er utformet for å gjøre det så enkelt som mulig å sammenfatte setninger. Folk kan bruke TD Talk for å forbli en aktiv del av samtalen. TD Talk ser ut og føles kjent ut, slik at folk som bruker det kan komme i gang så raskt som mulig. TD Talk lærer folks unike setningsstrukturer og ordbruk for å kontinuerlig tilpasse seg og tilby personlig relevante kommunikasjonsalternativer.

1.1 Systemkrav

Tabell 1: iOS

	Operativsystem	Enhet	Minne	Berøring	Kamera
Minimum	iOS 15,1	iPad 7. generasjon	4 GB	Integrert berøring	Integrert kamera
Anbefalt	iOS 15,1	iPad 8. generasjon	4 GB	Integrert berøring	Integrert kamera

1.2 Støttede språk

- Dansk (DK)
- Nederlandsk (NL)
- Engelsk (USA)
- Fransk (FR)
- Tysk (DE)
- Italiensk (IT)
- Norsk (NO)
- Spansk (Latin-Amerika)
- Svensk (SE)
- Flere språk kommer snart!

1.3 Slik skaffer du deg TD Suite

TD Talk er tilgjengelig via TobiiDynavox.com for Windows-enheter og i Apples App Store for iPadOS.

2 Ressurser og støtte

Tobii Dynavox tilbyr flere gratisressurser for å støtte og supplere din opplevelse med TD Talk. Ikke gå glipp av disse verktøyene som vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av Tobii Dynavox-programvaren!

2.1 Nettressurser og støtte

Det første stedet du bør sjekke hvis du trenger hjelp, er opplærings- og støttedelen på nettstedet til Tobii Dynavox.

2.2 Opplæring



Læringscenteret er per i dag kun på engelsk.

Se tobiidynavox.com for dokumentasjon, opplæring og andre ressurser, inkludert:

- svar på ofte stilte spørsmål
- opplæringsvideoer
- opptak av nettseminarer
- nettkurs


3 Kom i gang

Hvis TD Talk skal brukes sammen med en øyestyringsenhet, må du sørge for å ha en aktiv kalibrering for øyestyringsenheten.

- iOS – bruk TD CoPilot-appen til å konfigurere øyestyringsenheten.

Se brukerveiledningen for TD Pilot for mer informasjon.


3.1 Oversikt over TD Talk

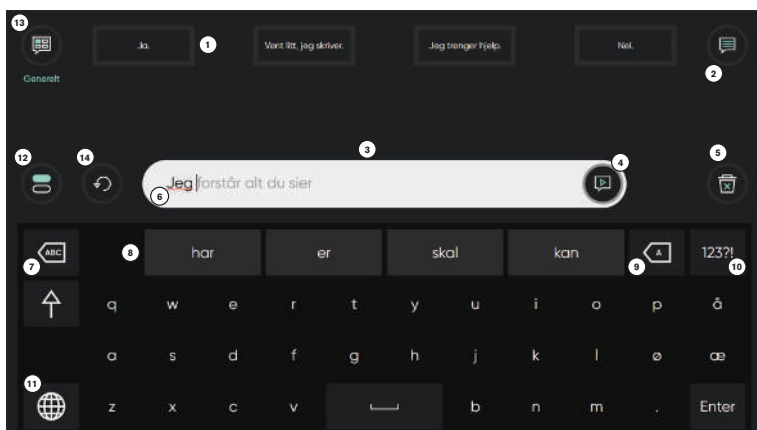

Illustrasjon 2: TD Talk

Plassering	Beskrivelse	Plassering	Beskrivelse
1	Hurtigmeldinger Forhåndsskrevne meldinger som leses opp umiddelbart når de velges	8	Ordprediksjon / Utvidelse av forkortelser Foreslår ord automatisk basert på det du har skrevet så langt. Når du bruker Utvidelse av forkortelser, erstattes det første ordet av utvidelsen.
2	Flere hurtigmeldinger Tilgang til alle hurtigmeldinger for gjeldende tema.	9	Backspace Slett tegnet til venstre for markøren.
3	Meldingsvindu Vis og rediger teksten du ønsker å si høyt her.	10	Tallside Tilgang til tall og spesialtegn.
4	Snakk Les opp teksten i meldingsvinduet. Du kan også pause og gjenoppta opplesingen.	11	Endre språk Bytt mellom språkene du snakker.
5	Tøm Fjern all teksten i meldingsvinduet.	12	Chat Bytt til et annet meldingsvindu, slik at du kan skrive en ny melding uten å miste teksten i det første meldingsvinduet.
6	Setningsprediksjon TD Talk lærer av det du skriver, og bruker den informasjonen til å foreslå fraser. Prediksjonen er basert på hyppighet, og kan gjøre kommunikasjonen raskere og mer personlig.	13	Tema Organiser hurtigmeldinger etter tema. Bytt til et tema for å få tilgang til disse meldingene.
7	Slett ord Slett ordet til venstre for markøren.	14	Angre Angre handlingene i meldingsvinduet.

3.2 Meny utenfor skjermen

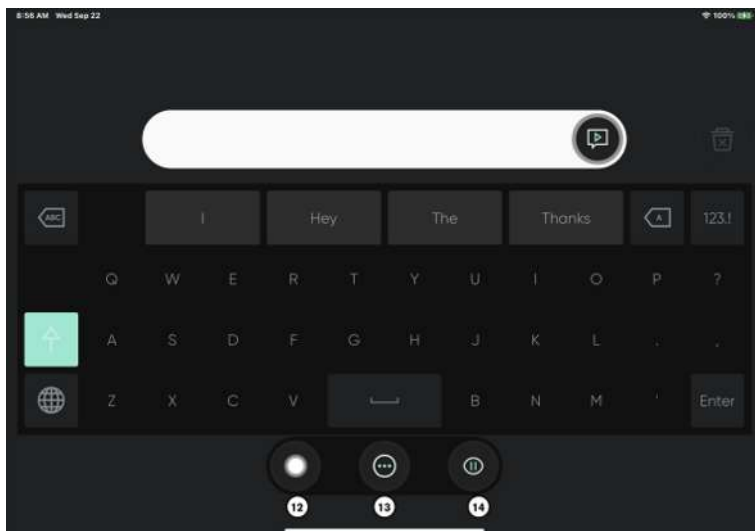

Illustrasjon 3: TD Talk-meny utenfor skjermen


Plassering	Beskrivelse	Plassering	Beskrivelse
14	AssistiveTouch Slå på AssistiveTouch. Bruk AssistiveTouch for å få tilgang til hjemskjermen og alle andre apper.	16	Pause/gjenoppta øyestyring Trykk på knappen for å midlertidig pause og gjenoppta øyestyring.
15	Mer Tilgang til kontrollpanelet og innstillinger.	17	Se gjennom-modus Gjør grensesnittet i TD Talk gjennomsiktig og slå på kameraet bak. Med denne modusen kan du se hva som er foran enheten din, for eksempel kommunikasjonspartneren din, mens du bruker TD Talk.

3.2.1 Hvordan får jeg tilgang til menyen utenfor skjermen i TD Talk?

Du kan få tilgang til menyen utenfor skjermen på to måter i TD Talk:

- **Som bruker:** Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.
- **Som omsorgsperson:** Sveip opp fra bokstaven **T** på tastaturet til TD Talk.

3.3 Kontrollpanelet

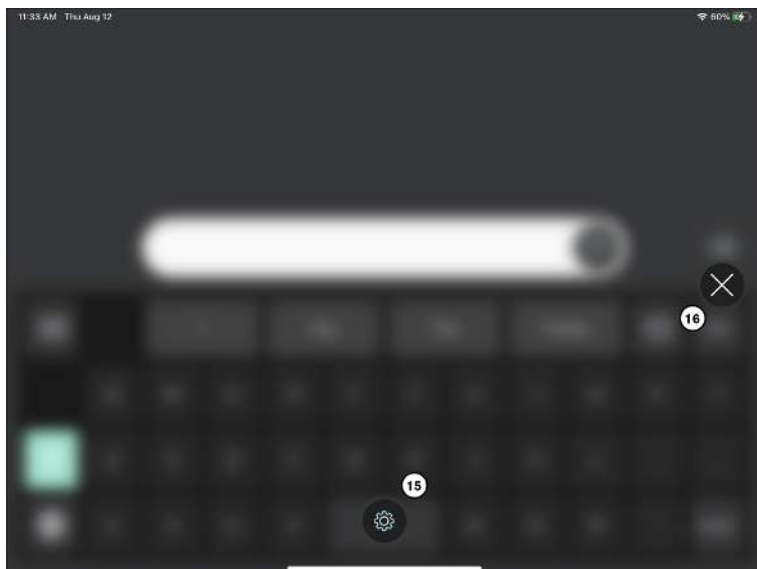

Illustrasjon 4: Kontrollpanel for TD Talk

Plassering	Beskrivelse	Plassering	Beskrivelse
15	Innstillinger for TD Talk For mer informasjon, se 5 Innstillinger for TD Talk, side 20	16	Avslutt kontrollpanelet Velg knappen for å avslutte kontrollpanelet.

3.3.1 Hvordan får jeg tilgang til kontrollpanelet i TD Talk?

- Du kan gå inn på innstillingene på en av følgende måter:
 - Som bruker:** Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyingsenheten eller området til øyestyingsenheten.
 - Som omsorgsperson:** Sveip opp fra bokstaven T på tastaturet til TD Talk.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

- Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3.3.2 Hvordan avslutter og lukker jeg TD Talk?

- Du kan gå inn på innstillingene på en av følgende måter:
 - Som bruker:** Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyingsenheten eller området til øyestyingsenheten.
 - Som omsorgsperson:** Sveip opp fra bokstaven T på tastaturet til TD Talk.



-knappen (AssistiveTouch) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

- Velg  -knappen (AssistiveTouch) for å åpne AssistiveTouch-menyen.

- Velg  -knappen (Hjem) i AssistiveTouch-menyen.

3.4 Oppsett av TD Talk



1. Velg TD Talk-appen på startskjermen på iPadOS-enheten.
2. Du kan gå inn på innstillingene på en av følgende måter:
 - **Som bruker:** Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.
 - **Som omsorgsperson:** Sveip opp fra bokstaven T på tastaturet til TD Talk.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.



3. Velg -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.



4. Velg handlingen (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.

5. Velg programspråk for TD Talk:



- Velg (Neste skjerm)-knappen på høyre side.



- Se etter (Generell)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
- Velg **Åpne**-knappen.
- Se i avsnittet om **Programspråk**.
- Velg alternativknappen ved siden av språket du vil ha i programmet.



- Velg knappen (Tilbake) for å gå tilbake til innstillingene for TD Talk.

6. Velg stemmen(e) som skal brukes:



- Se etter -ikonet (Stemme) for å finne det riktige innstillingskortet.
- Velg **Åpne**-knappen.
- Se i avsnittet om **Din(e) stemme(r)**.
- Velg alternativknappen under det installerte språket du vil snakke.



Hvis du ikke finner språket du vil snakke, kan du se 5.3.4.1 *Hvordan legger jeg til / laster ned et nytt språk/ tastaturspråk i TD Talk?*, side 29 og 5.3.4.2 *Hvordan velger og aktiverer jeg tastaturspråk som skal brukes / være tilgjengelige i TD Talk?*, side 30.

- Velg alternativknappen ved siden av stemmen du vil bruke i listen over tilgjengelige stemmer for språket du vil snakke.

Bruk knappene "Rull opp" og "Rull ned" til høyre for å bla gjennom listen over tilgjengelige stemmer for språket.



Hvis du vil prøve en stemme, velger du ved siden av stemmen. Hvis tilgjengelig.



Hvis det er en (nedlasting) i stedet for en alternativknapp, velger du knappen for å laste ned stemmen.



- Gjenta de siste to trinnene ovenfor for å kunne snakke på mer enn ett språk.




7. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.



I TD Talk kan du raskt bytte språk mellom de valgte språkene ved å velge -knappen nederst til venstre på tastaturet.

4 Slik bruker du TD Talk

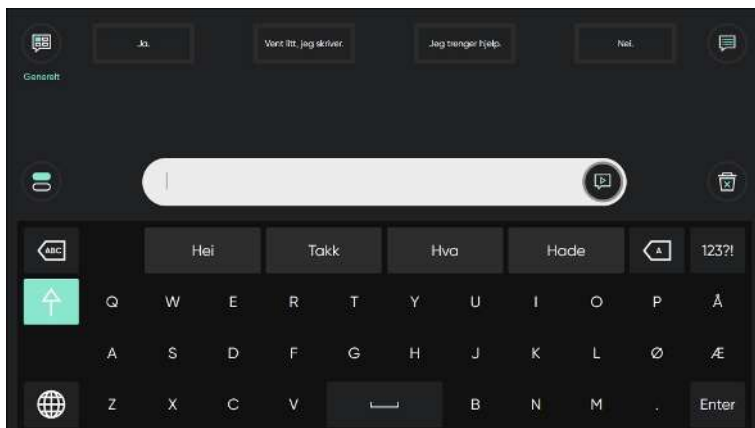

Illustrasjon 5: TD Talk

4.1 Slik bruker du tastaturet


Velg bokstaver på tastaturet, så formuleres (eller bygges) ord og setninger i meldingsvinduet. Velg -knappen (Snakk) når du er klar til å snakke.

4.2 Slik bruker du prediksjon

TD Talk byr på både Ordprediksjon og Fraseprediksjon, funksjoner som kan redusere innsatsen din og/eller gjøre det raskere å lage meldinger.

4.2.1 Ordprediksjon

Ordprediksjonsmotoren som brukes i TD Talk er fra SwiftKey™ og brukes i mange nettbrett og smarttelefoner. SwiftKey™ bruker ulike typer kunstig intelligens for å forutsi det neste ordet som brukeren kommer til å skrive. SwiftKey™ lærer fra tekst som brukeren har skrevet tidligere, og bruker både den aktuelle inndatateksten og det den har lært for å tilby prediksjoner eller vise prediksjoner. Ordprediksjonsspråket endres avhengig av tastaturets språkinnstillinger.

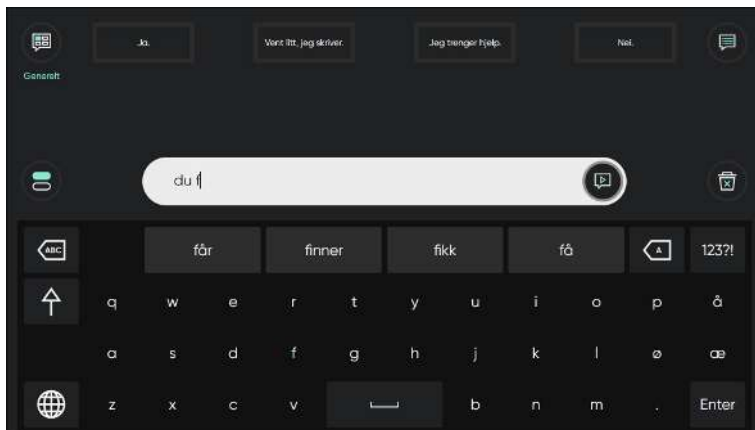


Når ordprediksjon er i bruk, vil fire (4) bokser vises over tastaturet. Boksen lengst til venstre viser det mest sannsynlige ordet, og de andre tre (3) boksene inneholder ett ord hver. Du velger et ord ved å velge boksen med det riktige ordet. Hvis du ikke finner ordet du ser etter, fortsetter du å skrive. Ordet du ser etter vil kanskje vises etter det neste tegnet.

Hvis du bruker ordprediksjon og vil skrive et ord med aksent "kafé", kan det ofte lønne seg å la ordprediksjon ta seg av aksenten. Skriv bare inn "kafe" og du vil få forslag om "kafé".

4.2.2 Setningsprediksjon


TD Talk lærer og analyserer hvordan du snakker over tid. Ordprediksjon lærer ordene du sier. Setningsprediksjon lærer hvordan du setter disse ordene sammen, og lager et sett med personlige setninger. Når du begynner å skrive, vises setningsprediksjoner fra settet ditt med setninger i grå tekst i meldingsvinduet.

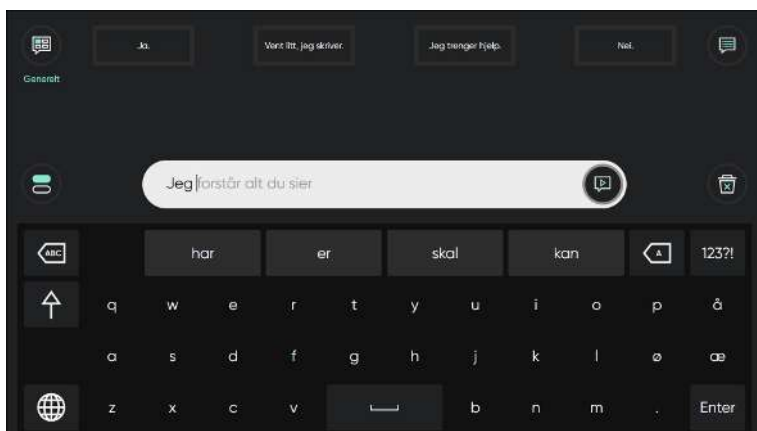

Se og fest blikket på det siste ordet i setningsprediksjonen for å velge setningen. Setningens farge endres fra grå til svart for å indikere at den er valgt. Den kan nå leses eller redigeres.

4.3 Redigere en melding

4.3.1 Hvordan redigerer jeg en melding i TD Talk?

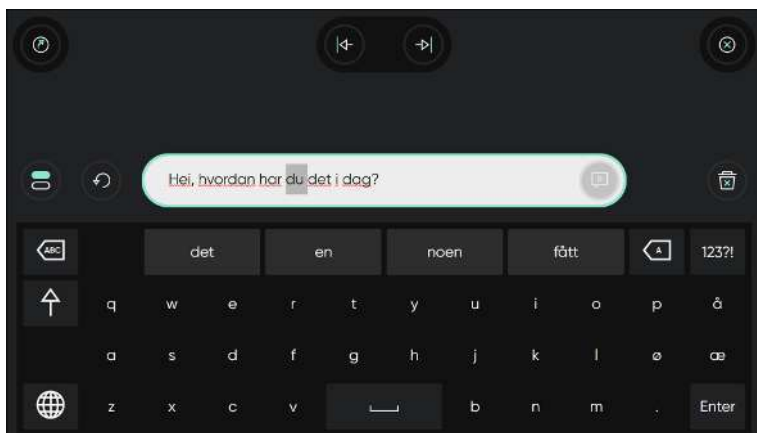

Illustrasjon 6: Redigeringsmenyen

1. Fest blikket på tekst i Meldingsvindu for å redigere i Meldingsvinduet. Redigeringsmenyen åpnes.
2. Når et ord er valgt, kan du skrive for å erstatte ordet, velge et ord fra ordprediksjon eller velge å slette det.

Bruk pilene  (Flytt til venstre) og  (Flytt til høyre) hvis markøren er på feil sted.

3. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av redigeringsmodus.

4.4 Kopier og lim inn

4.4.1 Hvordan bruker jeg Kopier i TD Talk?



Kopieringsfunksjonen i TD Talk kopierer hele meldingsvinduet.

1. Fest blikket på tekst i Meldingsvindu for å redigere i Meldingsvinduet. Redigeringsmenyen åpnes.



Velg (Kopier)-knappen.

4.4.2 Hvordan bruker jeg Lim inn i TD Talk?

1. Se på det tomme meldingsvinduet. Menyen Kopier vil åpnes.



Velg (Lim inn)-knappen.

Meldingen vil vises i meldingsvinduet.



Du kan lime inn tekst som er kopiert fra en tekstkilde i en hvilken som helst annen programvare på enheten.



I iOS vil en popup fra Apple vises når du limer inn mellom programmer. Du kan tillate det hver gang med assisterende berøring ELLER endre Apple-innstillinger for alltid å tillate dette. TD Talk vil spørre om du vil gå til den innstillingen.

4.5 Bruke hurtigmeldinger

4.5.1 Hvordan bruker jeg hurtigmeldinger i TD Talk?



Det finnes to (2) typer hurtigmeldinger, og de første er alltid synlige på startskjermen. De andre er nedenfor -knappen (Flere hurtigmeldinger).


Hurtigmeldinger på startskjermen

1. Velg **hurtigmeldingen** du vil si.
Den valgte meldingen sies umiddelbart, slik at den ikke legges til i meldingsvinduet og forstyrrer eventuelle meldinger du har der.

Flere hurtigmeldinger




1. Velg -knappen (Flere hurtigmeldinger).

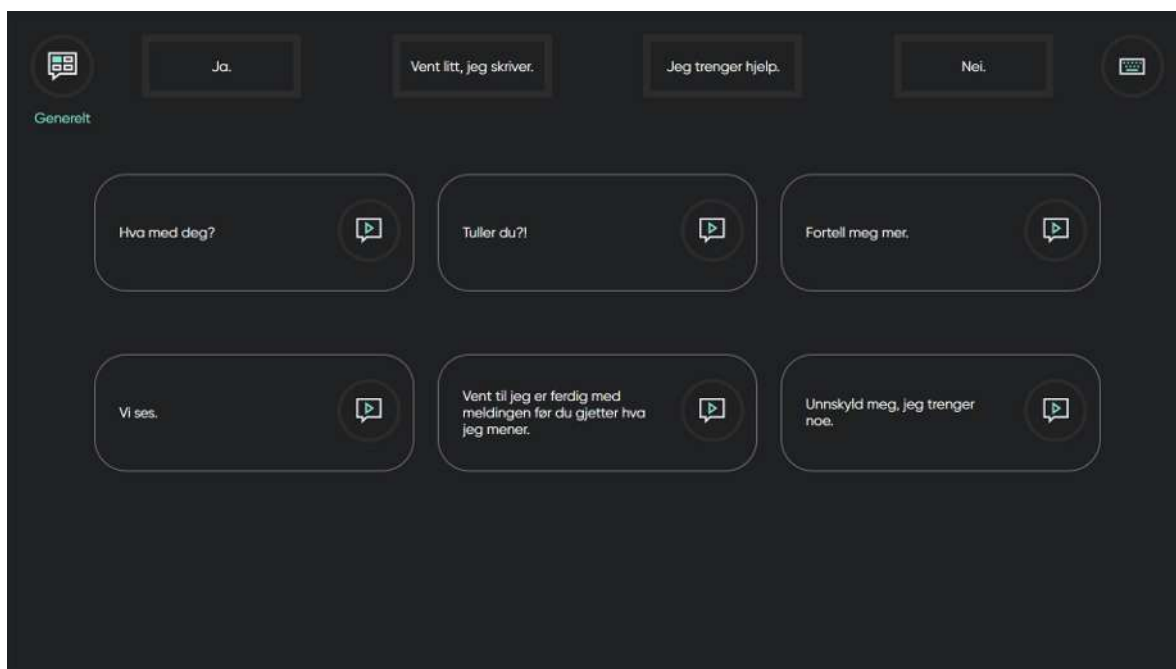

2. Velg -knappen (Snakk) ved siden av meldingen.
3. Velg -knappen (Tastatur) for å gå tilbake til startskjermen.

4.5.2 Hvordan endrer jeg tema for hurtigmeldinger?

1. Velg -knappen (Tema-knappen).
2. Velg det nye temaet.

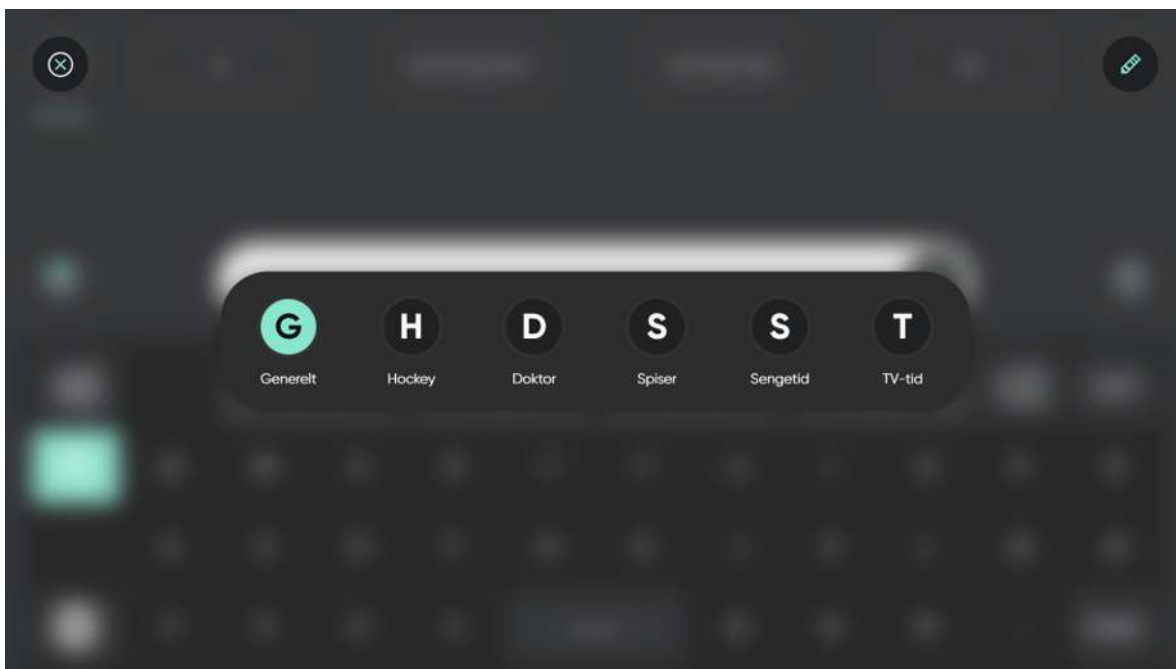

 Velg  -knappen (Rediger) for å endre temaene som vises / gjøres tilgjengelige i menyen Tema. For mer informasjon, se 5.4.1 Tema, side 32.

4.6 Endre språket

4.6.1 Hvordan bytter jeg språk i TD Talk?

1. Velg  -knappen (Språk) på tastaturet.
2. Velg språket du vil snakke
Hvis språket du vil ha mangler, kan du se 5.3.4.1 Hvordan legger jeg til / laster ned et nytt språk/tastaturspråk i TD Talk?, side 29
3. Velg  -knappen (Tilbake) for å gå tilbake

4.7 Chat

Velg  -ikonet (Chat) for å bytte til et annet meldingsvindu, slik at du kan skrive en ny melding uten å miste teksten i det første meldingsvinduet.

Velg  -ikonet (Gå tilbake til chat) for å bytte tilbake til det første meldingsvinduet.

4.8 Se gjennom-modus



Gjør grensesnittet i TD Talk gjennomsiktig og slå på kameraet bak. Med denne modusen kan du se hva som er foran enheten din, for eksempel kommunikasjonspartneren din, mens du bruker TD Talk.

4.8.1 Hvordan starter jeg Se gjennom-modus

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten. Off-Screen Menu vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Se gjennom-modus).


4.8.2 Hvordan avslutter jeg Se gjennom-modus

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyesporingsenheten eller området til øyesporingsenheten. Off-Screen Menu vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Avslutt Se gjennom-modus).

4.9 Hvordan bruker jeg utvidelse av forkortelser i TD Talk?

Når du skriver inn en eksisterende forkortelse, vil den første posisjonen i ordprediksjonene bli endret til utvidelsen av forkortelsen.

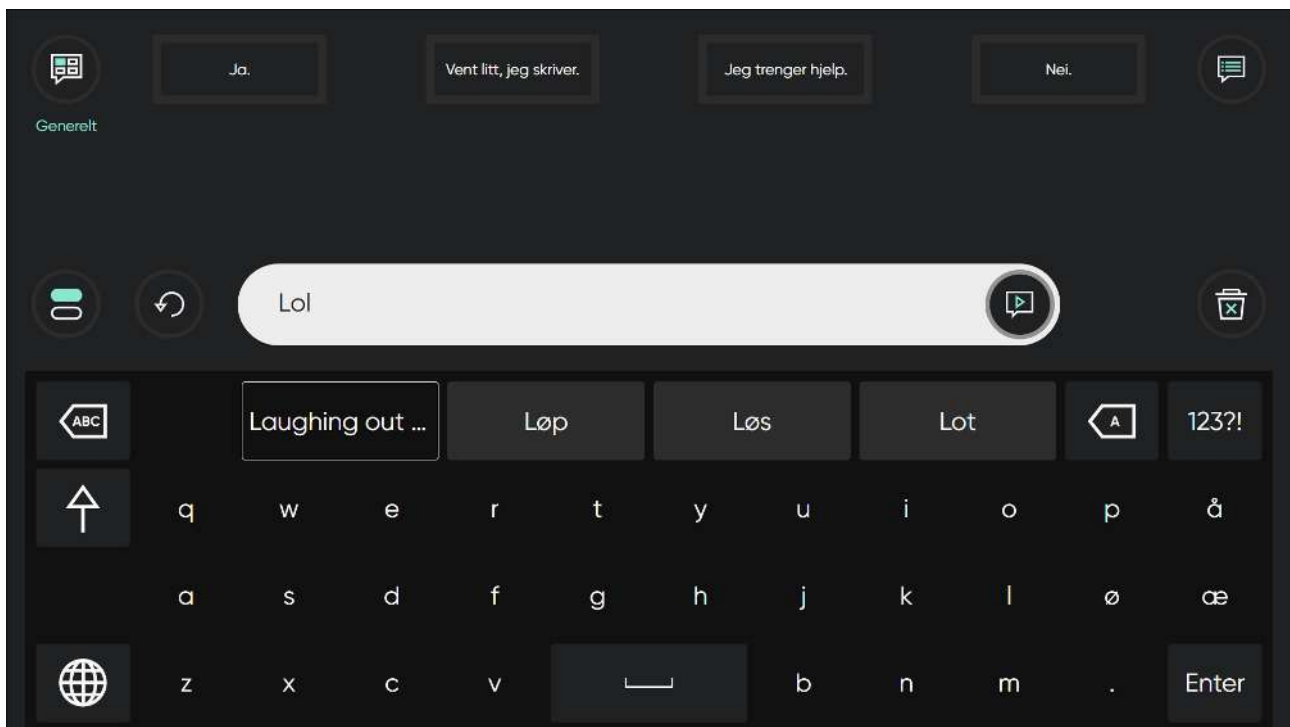


Velg Utvidelse av forkortelser i området Ordprediksjon for å utvide forkortelsen til meldingsvinduet.

Se Utvidelse av forkortelser for mer informasjon om hvordan du legger til, redigerer og sletter utvidelser av forkortelser.

4.10 Hvordan angrer jeg en handling i TD Phone?

Velg knappen  (Angre) ved siden av meldingsvinduet for å angre handlinger som er gjort i meldingsvinduet siden du begynte å skrive i det aktive meldingsvinduet, én etter én.

5 Innstillinger for TD Talk

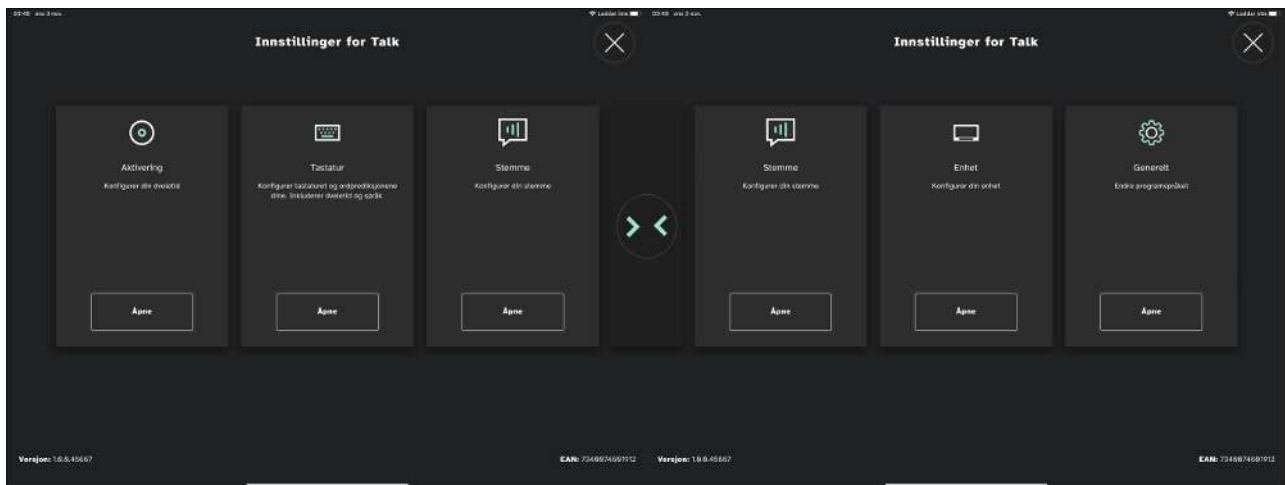

Ikoner	Handling	Beskrivelse
	Aktivering	Bare tilgjengelig hvis en øyestyringsenhet er installert og aktivert. Åpner innstillinger for Aktivering . For mer informasjon, se 5.2 Aktivering, side 22.
	Tastatur	Åpner innstillinger for Tastatur . For mer informasjon, se 5.3 Tastatur, side 26.
	Stemme	Åpner innstillinger for Stemme . For mer informasjon, se 5.5 Stemme , side 39.
	Enhet	Åpner Enhet -innstillinger. For mer informasjon, se 5.6 Enhet , side 46.
	Generelt	Åpner generelle innstillinger. For mer informasjon, se 5.7 Generelt, side 47.

5.1

Min konto



Logg på myTobiiDynavox Account for å sikkerhetskopiere og gjenopprette dine egne ordprediksjoner, uttaler, fraseprediksjoner, temaer og hurtigmeldinger mellom enhetene dine.

5.1.1 Hva er en myTobiiDynavox-konto?

En myTobiiDynavox Account er en nettbasert plattform levert av Tobii Dynavox, et selskap som spesialiserte seg på assisterende teknologi for personer med kommunikasjons- og mobilitetsutfordringer. myTobiiDynavox Account gir brukere tilgang til ulike ressurser, inkludert sikkerhetskopiering og gjenoppretting av personlige data, programvareoppdateringer, støttmateriell, brukerfora og nettbaserte opplæringskurs. Den fungerer også som en portal for administrering av enhetsinnstillinger, oppretting og deling av kommunikasjonstavler og tilgang til tilleggsfunksjoner skreddersydd til behovene til folk som bruker enheter fra Tobii Dynavox. Det er rett og slett en sentral plattform der brukere kan administrere løsninger for assisterende teknologi og få støtte fra Tobii Dynavox-fellesskapet.

5.1.2 Hvordan oppretter jeg en myTobiiDynavox-konto?

Gå til [Opprett en myTobiiDynavox-konto](#) for å opprette en myTobiiDynavox-konto.

5.1.3 Hvordan sikkerhetskopierer jeg personlige data?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.



3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.

4. Se etter -ikonet (Logg på) øverst til venstre på skjermen.
5. Bruk tastaturet til å skrive inn brukernavnet ditt i feltet **Brukernavn**.
6. Bruk tastaturet til å skrive inn passordet ditt i feltet **Passord**.
7. Velg **Logg inn**-knappen.
8. Velg **Sikkerhetskopier**-knappen.
Datoen da sikkerhetskopieringen ble gjort, og fra hvilken enhet, vises til venstre for Sikkerhetskopier-knappen når en sikkerhetskopiering er utført.
9. Velg -knappen (Lukk) for å avslutte.

5.1.4 Hvordan gjenoppretter jeg personlige data?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.
3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.




4. Se etter -ikonet (Logg på) øverst til venstre på skjermen.
5. Bruk tastaturet til å skrive inn brukernavnet ditt i feltet **Brukernavn**.
6. Bruk tastaturet til å skrive inn passordet ditt i feltet **Passord**.
7. Velg **Logg inn**-knappen.
8. Velg knappen **Gjenopprett**.
Datoen da gjenopprettingen ble gjort, vises til venstre for Gjenopprett-knappen når en gjenoppretting er utført.
9. Velg -knappen (Lukk) for å avslutte.

5.2 Aktivering



Bare tilgjengelig hvis en øyestyringsenhet er installert og aktivert.

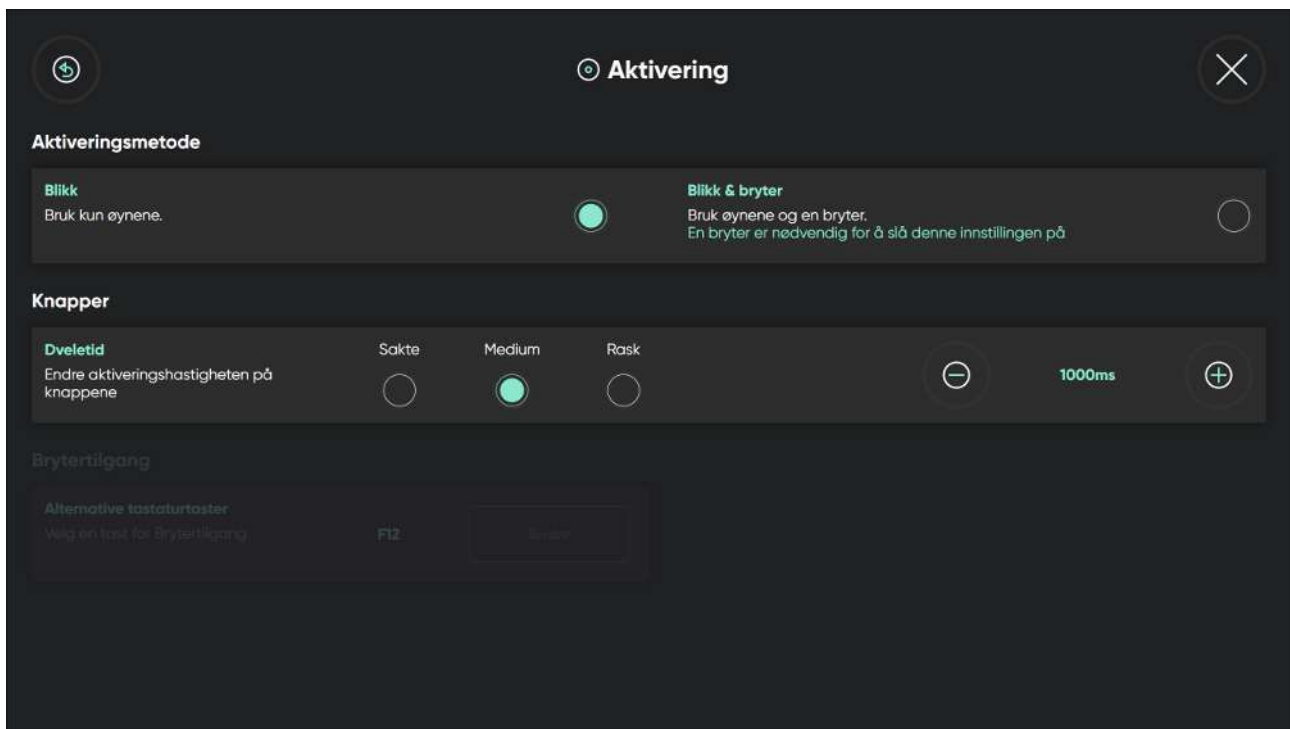

5.2.1 Aktiveringsmetode

5.2.1.1 Hvordan velger jeg aktiveringsmetode i TD Talk?

 Valg av aktiveringsmetode for Aktivering viser ikke til aktivering av taster på tastaturet, men til alle andre aktiveringer i TD Talk.

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyingsenheten eller området til øyestyingsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3. Velg  (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.

4. Se etter  (Aktivering)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.

5. Velg **Åpne**-knappen.

6. Se i avsnittet om **Aktiveringsmetoden**.

7. Velg alternativknappen for **Aktiveringsmetode** for å bruke en av følgende verdier:
 - **Gaze** – Bruk kun øynene (standard)
 - Blikk og bryter – Bruk øynene og en bryter



En bryter er nødvendig for å slå denne innstillingen på.

8. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

9. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.2.2 Knapper

5.2.2.1 Hvordan endrer jeg dveletid for aktiveringsknapper i TD Talk?

 Knappene refererer ikke til de på tastaturet, men de som er plassert på alle andre steder i TD Talk.

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.

4. Se etter  -ikonet (Aktivering) for å finne det riktige innstillingskortet.

5. Velg **Åpne**-knappen.

6. Se i avsnittet om **Knapper**.

7. Velg alternativknappen for **Dveletid** for en av de følgende verdiene:

- Sakte
- **Middels** (standard)
- Rask

8. Velg knappen  (Tilbake) for å gå tilbake til innstillingene for TD Talk.

9. Velg knappen  (Lukk) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.2.2.2 Hvordan finjusterer jeg dveletid for aktiveringsknapper i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.

4. Se etter  -ikonet (Aktivering) for å finne det riktige innstillingskortet.

5. Velg **Åpne**-knappen.

6. Se i avsnittet om **Knapper**.

7. Velg en av følgende knapper for å finjustere **dveletiden**:

-  — for å redusere dveletiden

-  — for å øke dveletiden

Verdien kan endres mellom 200 ms og ubegrenset

8. Velg knappen  (Tilbake) for å gå tilbake til innstillingene for TD Talk.

9. Velg knappen  (Lukk) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.2.3 Brytertilgang

Some switches requires that a keyboard key is set for switch input.



Hvis en Brytertilgang er angitt, vil denne tasten på tastaturet også fungere som en bryter hvis den er valgt på et tilkoblet eksternt tastatur.

5.2.3.1 Hvordan stiller jeg inn brytertilgang for bryteren min i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.



3. Velg (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.



4. Se etter (Aktivering)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.

5. Velg **Apne**-knappen.

6. Se i delen **Brytertilgang**.

7. Velg **Endre**-knappen.

8. Velg alternativknappen for tasten som skal brukes for **Brytertilgang**.

9. Velg **Ok**-knappen for å bruke den, eller **Avbryt**-knappen for å avbryte.





10. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.



11. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.3 Tastatur

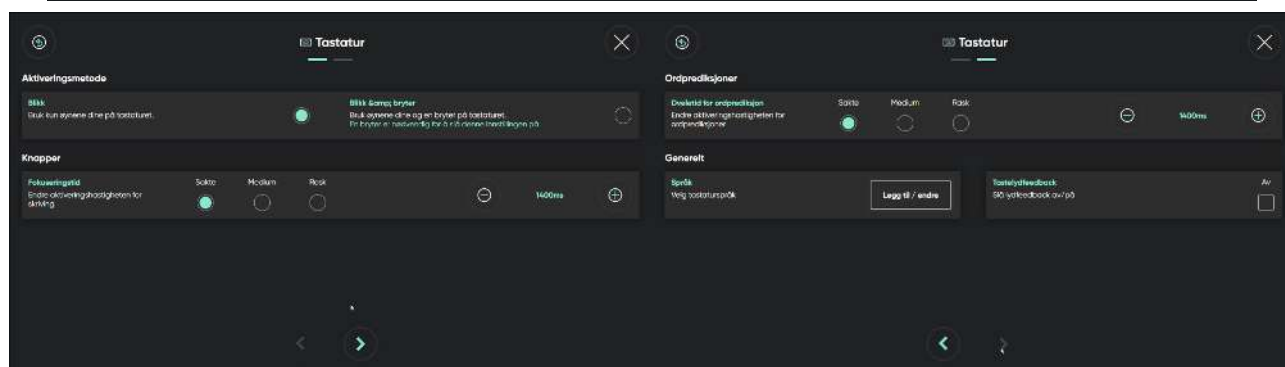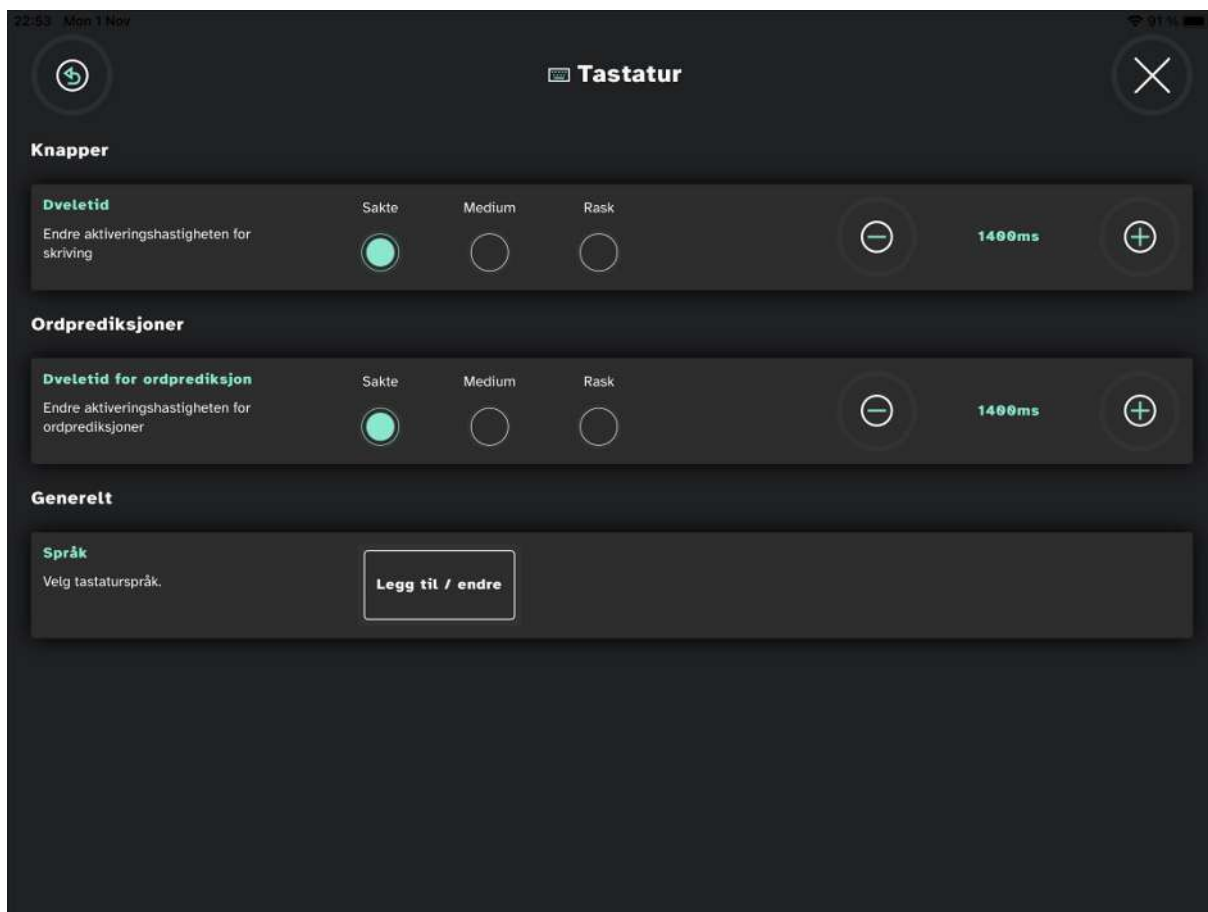

5.3.1 Aktiveringsmetode

5.3.1.1 Hvordan velger jeg aktiveringsmetode for tastaturet i TD Talk?



Valg av aktiveringsmetode for Tastatur viser kun til aktivering av taster på tastaturet i TD Talk.

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyrsenheten eller området til øyestyrsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.



3. Velg  (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.



4. Se etter  (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg **Apne**-knappen.
6. Se i avsnittet om **Aktiveringsmetoden**.
7. Velg alternativknappen for **Aktiveringsmetode** for å bruke en av følgende verdier:
 - **Gaze** – Bruk kun øynene (standard)
 - Blikk og bryter – Bruk øynene og en bryter



En bryter er nødvendig for å slå denne innstillingen på.



8. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.



9. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.3.2 Knapper

5.3.2.1 Hvordan endrer jeg dveletid for tastaturknapper i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.



3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.



4. Se etter  -ikonet (Tastatur) for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg **Apne**-knappen.
6. Se i avsnittet om **Knapper**.
7. Velg alternativknappen for **Dveletid** for en av de følgende verdiene:
 - Sakte
 - **Middels** (standard)
 - Rask



8. Velg knappen  (Tilbake) for å gå tilbake til innstillingene for TD Talk.



9. Velg knappen  (Lukk) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.3.2.2 Hvordan finjusterer jeg dveletid for aktiveringsknapper i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.



3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.



4. Se etter  -ikonet (Tastatur) for å finne det riktige innstillingskortet.

5. Velg **Apne**-knappen.

6. Se i avsnittet om **Knapper**.

7. Velg en av følgende alternativknapper for å finjustere **dveletiden**:



–  — for å redusere dveletiden



–  — for å øke dveletiden

Verdien kan endres mellom 200 ms og ubegrenset



8. Velg knappen  (Tilbake) for å gå tilbake til innstillingene for TD Talk.



9. Velg knappen  (Lukk) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.3.3 Ordprediksjon

5.3.3.1 Hvordan endrer jeg dveletid for prediksjonsknapper i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyingsenheten eller området til øyestyingsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.



3. Velg  (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.



4. Se etter  (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.

5. Velg **Apne**-knappen.



6. Velg  -knappen (Neste side) nederst på skjermen.

7. Se i avsnittet om **Prediksjoner**.

8. Velg alternativknappen for **Dveletid** for en av de følgende verdiene:

- Sakte
- **Medium** (standard)
- Rask



9. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.



10. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.3.3.2 Hvordan finjusterer jeg dweetid for prediksjonsknapper i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.



3. Velg  (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.



4. Se etter  (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.

5. Velg **Åpne**-knappen.



6. Velg -knappen (Neste side) nederst på skjermen.

7. Se i avsnittet om **Prediksjoner**.

8. Velg en av følgende alternativknapper for å finjustere **dweetiden**:



— for å redusere dweetiden



— for å øke dweetiden

Verdien kan endres mellom 200 ms og ubegrenset



9. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.



10. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.3.4 Generelt

5.3.4.1 Hvordan legger jeg til / laster ned et nytt språk/tastaturspråk i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.



3. Velg  (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.



4. Se etter  (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.

5. Velg **Åpne**-knappen.



6. Velg -knappen (Neste side) nederst på skjermen.

7. Se i avsnittet om **Generell**.

8. Velg **Legg til / endre**-knappen for "Velg tastaturspråk".

9. Velg fanen **Last ned**.



10. Velg -knappen (Last ned) ved siden av språket for å starte nedlastingen av det nye tastaturet.

11. Velg **Last ned**-knappen for å starte nedlastingen, eller **Avbryt**-knappen for å avbryte nedlastingen.
12. Velg fanen **Installert**.
13. Velg alternativknappen ved siden av språket for å aktivere det.

14. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

15. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.3.4.2 Hvordan velger og aktiverer jeg tastaturspråk som skal brukes / være tilgjengelige i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.



3. Velg  (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.



4. Se etter  (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.

5. Velg **Åpne**-knappen.



6. Velg  -knappen (Neste side) nederst på skjermen.
7. Velg **Legg til / endre**-knappen for "Velg tastaturspråk".
8. Velg fanen **Installert**.
9. Velg alternativknappen ved siden av språket for å aktivere tastaturspråket for det.



Sørg for å velge alternativknappen for alle språkene du vil ha en stemme tilgjengelig for.

10. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

11. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.3.4.3 Hvordan slår jeg på/av type lydtilbakemelding i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.



3. Velg  (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.



4. Se etter  (Tastatur)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.

5. Velg **Åpne**-knappen.




6. Velg  -knappen (Neste side) nederst på skjermen.
7. Se i avsnittet om **Generell**.
8. Slå **på/av** knappen for "Type lydtilbakemelding" til:


- På
- Av

9. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.
10. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.4 Samtaler

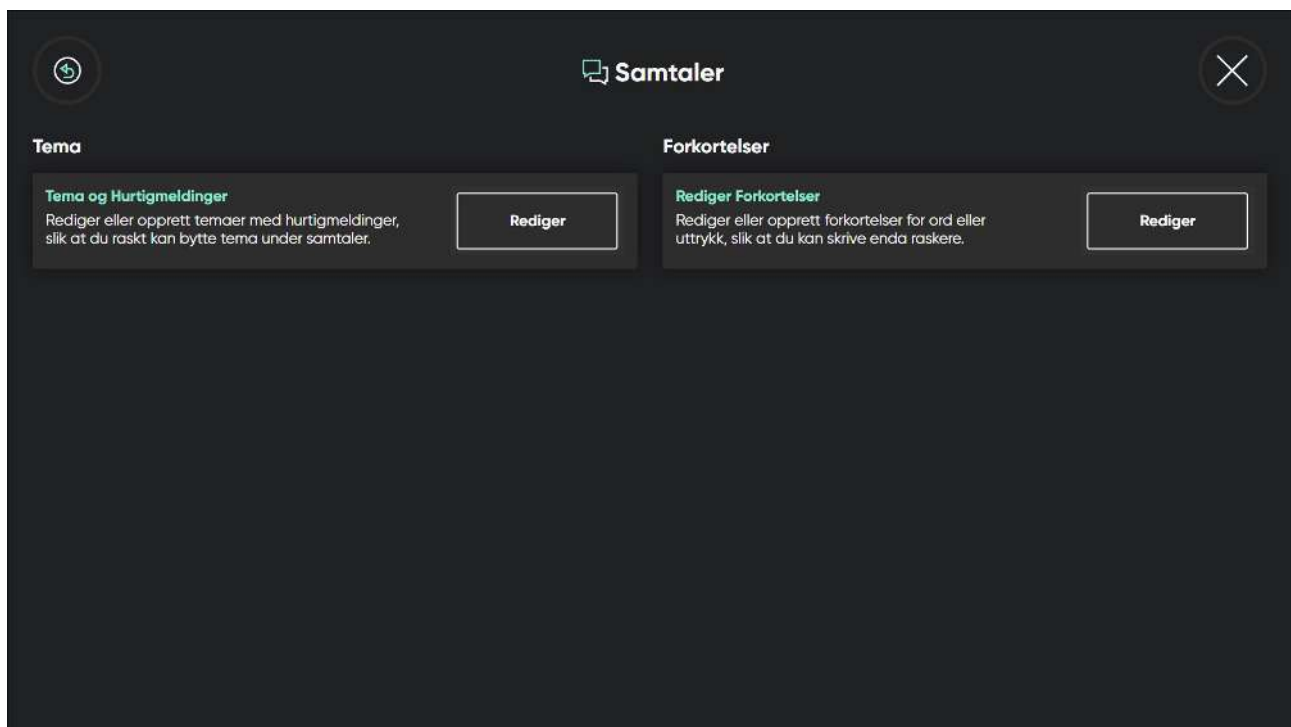

5.4.1 Tema

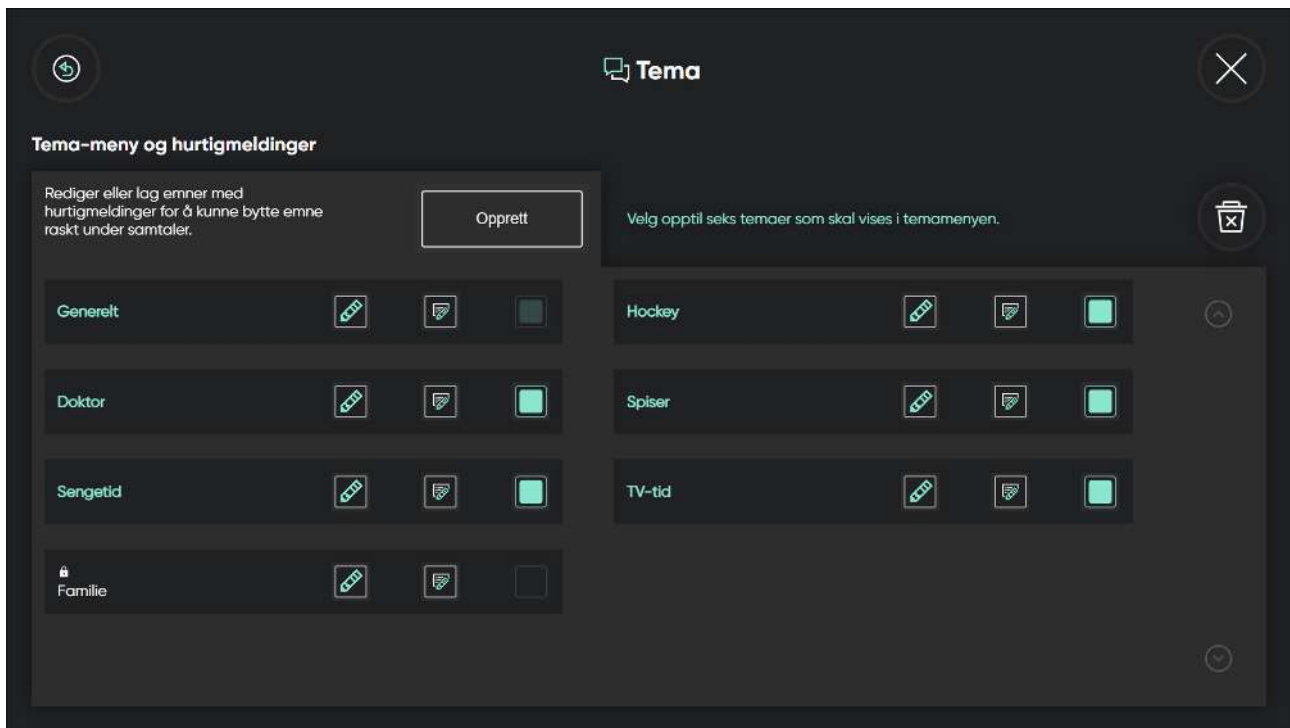

5.4.1.1 Hvordan oppretter jeg et nytt tema i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.

4. Se etter  (Aktivering)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.

5. Velg **Åpne**-knappen.

6. Velg **Opprett**-knappen.

7. Bruk tastaturet til å gi et navn til det nye temaet.



Velg avmerkingsboksen **Personvernmodus** for å slå av fraseprediksjon og læring.

8. Velg -ikonet (Lagre) for å lagre.

9. Velg -knappen (Lukk) for å avslutte.

5.4.1.2 Hvordan skifter jeg navn på et tema i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.
3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.
4. Se etter  (Aktivering)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg **Apne**-knappen.
6. Velg -knappen (Rediger) ved siden av nye temaets navn.
7. Bruk tastaturet til å skifte navn på temaet.
8. Velg  Velg avmerkingsboksen **Personvernmodus** for å slå av fraseprediksjon og læring.
9. Velg -ikonet (Lagre) for å lagre.
10. Velg -knappen (Lukk) for å avslutte.

5.4.1.3 Hvordan gjør jeg temaet privat i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.

1. -knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.
2. Velg -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.
3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.
4. Se etter  (Aktivering)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg **Apne**-knappen.
6. Velg -knappen (Rediger) ved siden av nye temaets navn.
7. Velg avmerkingsboksen **Personvernmodus** for å slå av fraseprediksjon og læring.
8. Velg -ikonet (Lagre) for å lagre.
9. Velg -knappen (Lukk) for å avslutte.

5.4.1.4 Hvordan velger jeg aktive teamer i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.

1. -knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.
2. Velg -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.
3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.

4. Se etter -ikonet (Samtaler) for å finne den korrekte innstillingen.
5. Velg **Åpne**-knappen.
6. Velg **Rediger**-knappen for temaer og hurtigmeldinger i delen Tema.
7. Velg **avmerkboksen** for temaet som skal være aktivt.



Opptil seks (6) temaer kan velges og være tilgjengelige i menyen Tema.

8. Velg -knappen (Lukk) for å forlate redigeringsvisningen.
9. Velg -knappen (Tastatur) for å gå tilbake til startskjermen.

5.4.1.5 Hvordan sletter jeg et tema i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.

4. Se etter -ikonet (Samtaler) for å finne den korrekte innstillingen.
5. Velg **Åpne**-knappen.
6. Velg **Rediger**-knappen for temaer og hurtigmeldinger i delen Tema.

7. Velg knappen  (Slett).

8. Velg -knappen (Slett) ved siden av navnet på temaet du ønsker å slette.
9. Velg **Slett**-knappen for å slette teamet, eller **Avbryt**-knappen for å avbryte.

10. Velg -knappen (Ferdig) når du er ferdig med å slette.
11. Velg -knappen (Lukk) for å forlate redigeringsvisningen.

12. Velg -knappen (Tastatur) for å gå tilbake til startskjermen.

5.4.1.6 Hvordan redigerer jeg hurtigmeldinger i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.

4. Se etter -ikonet (Samtaler) for å finne den korrekte innstillingen.
5. Velg **Åpne**-knappen.
6. Velg **Rediger**-knappen for temaer og hurtigmeldinger i delen Tema.

7. Velg -knappen (Rediger hurtigmeldinger).

8. Velg -knappen (Rediger) ved siden av meldingen du vil redigere.
9. Endre meldingen med tastaturet.

10. Velg -knappen (Lagre) for å lagre endringene i hurtigmeldingen.

11. Velg -knappen (Lukk) for å forlate redigeringsvisningen.

12. Velg -knappen (Tastatur) for å gå tilbake til startskjermen.

5.4.1.7 Hvordan legger jeg til en hurtigmelding i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.

4. Se etter -ikonet (Samtaler) for å finne den korrekte innstillingen.
5. Velg **Åpne**-knappen.
6. Velg **Rediger**-knappen for temaer og hurtigmeldinger i delen Tema.

7. Velg -knappen (Rediger hurtigmeldinger).

8. Velg -knappen (Legg til) ved siden av Legg til ny plassering.
Du kan ha opptil tre (3) sider med hurtigmeldinger for hvert tema.



Bruk  - og -knappene til å navigere mellom sider.

9. Skriv inn den nye meldingen ved hjelp av tastaturet.

10. Velg -knappen (Lagre) for å lagre den nye hurtigmeldingen.

11. Velg -knappen (Lukk) for å forlate redigeringsvisningen.

12. Velg -knappen (Tastatur) for å gå tilbake til startskjermen.

5.4.1.8 Hvordan sletter jeg en hurtigmelding i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.

4. Se etter -ikonet (Samtaler) for å finne den korrekte innstillingen.

5. Velg **Åpne**-knappen.

6. Velg **Rediger**-knappen for temaer og hurtigmeldinger i delen Tema.



7. Velg -knappen (Rediger hurtigmeldinger).

8. Velg -knappen (Rediger) ved siden av meldingen du vil slette.


9. Velg -knappen (Slett melding).

10. Velg -knappen (Lagre) for å lagre endringene i hurtigmeldingen.

11. Velg -knappen (Lukk) for å forlate redigeringsvisningen.

12. Velg -knappen (Tastatur) for å gå tilbake til startskjermen.

5.4.2 Utvidelse av forkortelser

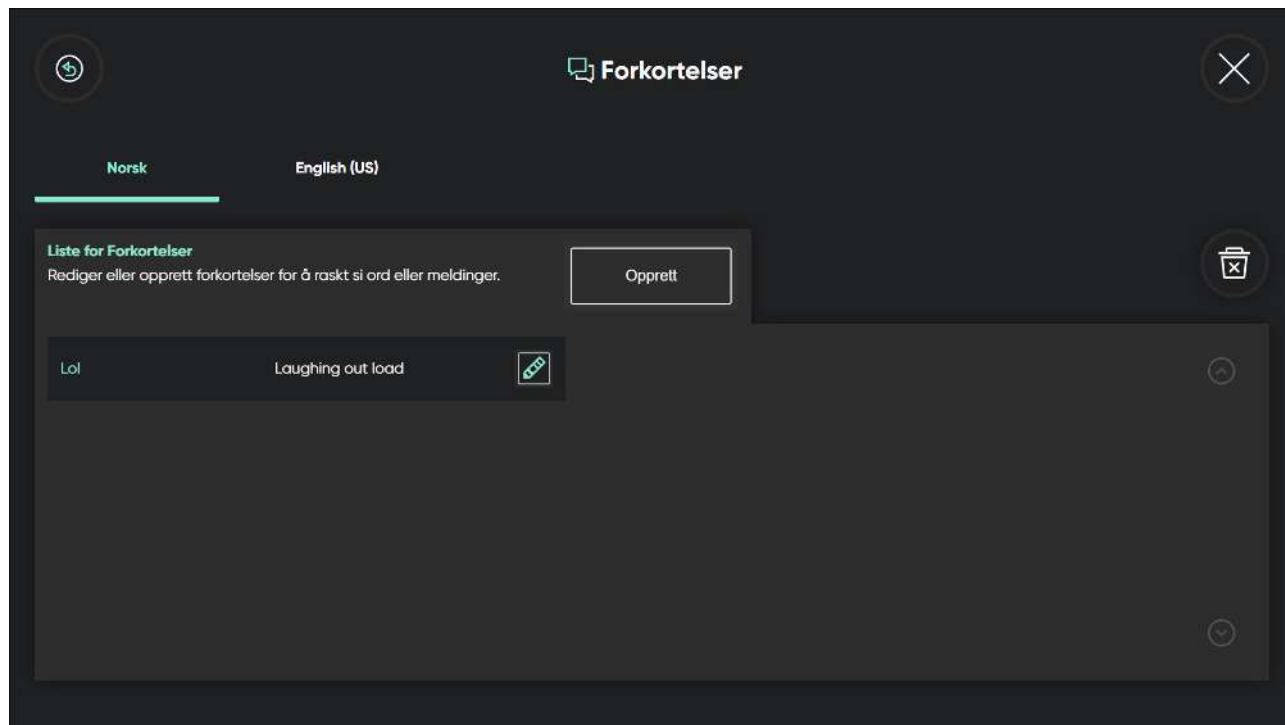

5.4.2.1 Hvordan legger jeg til en utvidelse av forkortelser i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.

4. Se etter -ikonet (Samtaler) for å finne den korrekte innstillingen.

5. Velg **Åpne**-knappen.

6. Velg knappen **Rediger** i området Rediger utvidelse av forkortelser under Utvidelse av forkortelser.

7. Velg **språk**-fanen for det installerte språket du vil legge til en utvidelse av forkortelser for.

8. Velg **Opprett**-knappen.

9. I tekstboksen **Forkortelse** skriver du inn forkortelsen du vil opprette.

10. Velg -ikonet ved siden av tekstboksen **Ord eller melding**.

11. I tekstboksen **Ord eller melding** skriver du inn ordet eller meldingen du vil opprette forkortelsen for.

12. Velg -knappen (Lagre) for å lagre endringene i utvidelsen av forkortelsen.

13. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til innstillingene for Samtaler.

14. Velg knappen  (Tilbake) for å gå tilbake til innstillingene for TD Talk.

15. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.4.2.2 Hvordan redigerer jeg en utvidelse av forkortelser i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.

4. Se etter  -ikonet (Samtaler) for å finne den korrekte innstillingen.

5. Velg **Åpne**-knappen.

6. Velg knappen **Rediger** i området Rediger utvidelse av forkortelser under Utvidelse av forkortelser.

7. Velg **språk**-fanen for det installerte språket du vil redigere en utvidelse av forkortelser for.

8. Velg  -ikonet ved siden forkortelsen du vil redigere.

9. I tekstboksen **Forkortelse** rediger du den nye forkortelsen du vil opprette.

10. Velg  -ikonet ved siden av tekstboksen **Ord eller melding**.

11. I tekstboksen **ny Ord eller melding** redigerer du det nye ordet eller den nye meldingen du vil opprette forkortelsen for.



12. Velg  -knappen (Lagre) for å lagre endringene i utvidelsen av forkortelsen.

13. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til innstillingene for Samtaler.

14. Velg knappen  (Tilbake) for å gå tilbake til innstillingene for TD Talk.

15. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.4.2.3 Hvordan sletter jeg en utvidelse av forkortelser i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.

4. Se etter  -ikonet (Samtaler) for å finne den korrekte innstillingen.

5. Velg **Åpne**-knappen.


6. Velg knappen **Rediger** i området Rediger utvidelse av forkortelser under Utvidelse av forkortelser.

7. Velg **språk**-fanen for det installerte språket du vil slette en utvidelse av forkortelser for.

8. Velg knappen  (Slett).
9. Velg knappen  (Slett) ved siden av forkortelsen du ønsker å slette.
10. Velg knappen **Slett** for å bekrefte slettingen av forkortelsen, eller **Avbryt** for å avbryte.
11. Velg  -knappen (Ferdig) når du er ferdig med å slette.
12. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til innstillingene for Samtaler.
13. Velg knappen  (Tilbake) for å gå tilbake til innstillingene for TD Talk.
14. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.5 Stemme

Angi talestemmen for tastaturspråket ditt her

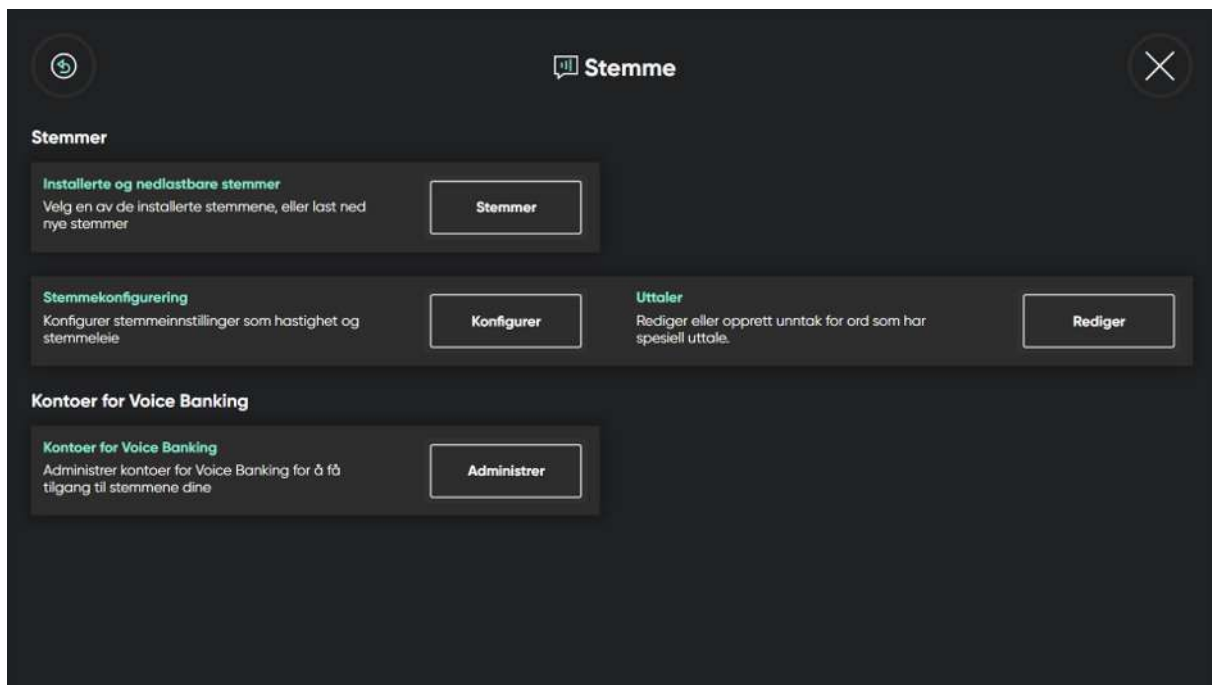

Alle språk som er installert, vises i den øverste delen av skjermen. Når språket er valgt, vises de tilgjengelige stemmene

for dette språket i listen nedenfor språkene. Hvis du vil prøve en stemme, velger du  ved siden av stemmen for å prøve den. Hvis tilgjengelig.

5.5.1 Stemmer

5.5.1.1 Installerte og nedlastbare stemmer

There are a lot of voices available within TD Talk, especially for some languages.

Filters can be applied to make it easier for the user to find their voice. For more information, see *5.5.1.1.3 Hvordan bruker jeg et filter for tilgjengelige stemmer i TD Talk?*, side 41

5.5.1.1.1 Hvordan laster jeg ned en ny stemme i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.

4. Se etter  -ikonet (Stemme) for å finne det riktige innstillingskortet.

5. Velg **Åpne**-knappen.

6. Se i avsnittet om **Stemmer**

7. Velg **Stemmer**-knappen for å se installerte og nedlastbare stemmer.

8. Velg fanen **Last ned**.

9. Velg fanen **språk** for det installerte språket du vil snakke.



Hvis du ikke finner språket du vil snakke, kan du se *5.3.4.1 Hvordan legger jeg til / laster ned et nytt språk/ tastaturspråk i TD Talk?*, side 29 og *5.3.4.2 Hvordan velger og aktiverer jeg tastaturspråk som skal brukes / være tilgjengelige i TD Talk?*, side 30.

10. Velg  -knappen (Last ned) ved siden av stemmen for å starte nedlastingen av den nye stemmen.
Bruk knappene "Rull opp" og "Rull ned" til høyre for å bla gjennom listen over tilgjengelige stemmer for språket.



Hvis du vil prøve en stemme, velger du  ved siden av stemmen.

11. Velg **Last ned**-knappen for å starte nedlastingen, eller **Avbryt**-knappen for å avbryte nedlastingen.

12. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til Stemmeinnstillinger.

13. Velg knappen  (Tilbake) for å gå tilbake til innstillingene for TD Talk.

14. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.5.1.1.2 Hvordan velger jeg stemmen min i TD Talk?

 Stemmene fra Voice Banking-systemet viser logoen til Voice Banking-tjenesten etter navnet til stemmen.

- Acapela MyOwnVoice 
- ModelTalker 
- The Voice Keeper 

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.

4. Se etter  -ikonet (Stemme) for å finne det riktige innstillingskortet.

5. Velg **Åpne**-knappen.

6. Se i avsnittet om **Stemmer**

7. Velg **Stemmer**-knappen for å se installerte og nedlastbare stemmer.

8. Velg fanen **språk** for det installerte språket du vil snakke.



Hvis du ikke finner språket du vil snakke, kan du se 5.3.4.1 *Hvordan legger jeg til / laster ned et nytt språk/tastaturspråk i TD Talk?*, side 29 og 5.3.4.2 *Hvordan velger og aktiverer jeg tastaturspråk som skal brukes / være tilgjengelige i TD Talk?*, side 30.

9. Velg stemmen du vil bruke i listen over tilgjengelige stemmer for språket du vil snakke.

Bruk knappene "Rull opp" og "Rull ned" til høyre for å bla gjennom listen over tilgjengelige stemmer for språket.



Hvis du vil prøve en stemme, velger du  ved siden av stemmen.

10. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til Stemmeinnstillinger.

11. Velg knappen  (Tilbake) for å gå tilbake til innstillingene for TD Talk.

12. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.5.1.1.3 Hvordan bruker jeg et filter for tilgjengelige stemmer i TD Talk?

On the **Installed** or **Download** tab, do the following:




1. Velg  -knappen (Filter).

2. Velg avkryssingsboksene ved siden av alternativer du vil bruke.

Du kan velge:

- Kjønn – kvinne, mann
- Alder – barn, tenåring og voksen

5.5.1.2 Stemmekonfigurering

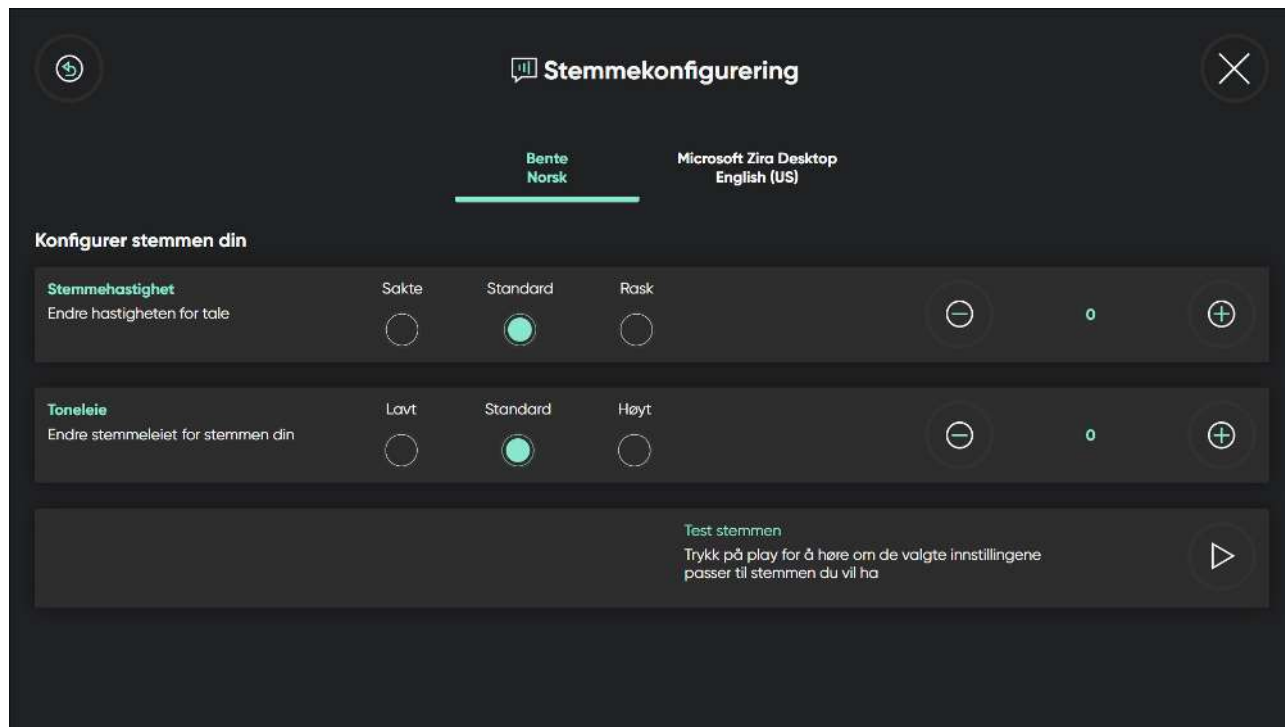

5.5.1.2.1 Hvordan gjør endringer på stemmen min i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.



4. Se etter  -ikonet (Stemme) for å finne det riktige innstillingskortet.
5. Velg **Åpne**-knappen.
6. Se i avsnittet om **Stemmer**
7. Velg **Konfigurer**-knappen for Stemmekonfigurering.
8. Velg stemmen du vil endre fra de tilgjengelige stemmene.
9. Velg alternativknappen for **Stemmehastighet** for en av de følgende verdiene:
 - Sakte
 - **Standard**
 - Raskfor å endre hastigheten for tale.
10. Velg en av følgende alternativknapper for å finjustere **stemmehastigheten**:



– for å redusere stemmehastigheten



– for å øke stemmehastigheten

Verdien kan endres mellom -10 og +10.

11. Velg alternativknappen for **Stemmeleie** for en av de følgende verdiene:

- Lavt
- **Standard**
- Høyt

for å endre stemmeleie for tale.



Hvis du vil høre den nye stemmen, velger du  i delen Test stemmen.

12. Velg en av følgende alternativknapper for å finjustere **stemmeleiet**:

–  – for å redusere stemmeleiet

–  – for å øke stemmeleiet

Verdien kan endres mellom -10 og +10.




Hvis du vil høre den nye stemmen, velger du  i delen Test stemmen.

13. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til Stemmeinnstillinger.

14. Velg knappen  (Tilbake) for å gå tilbake til innstillingene for TD Talk.

15. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.5.1.3 Uttaler

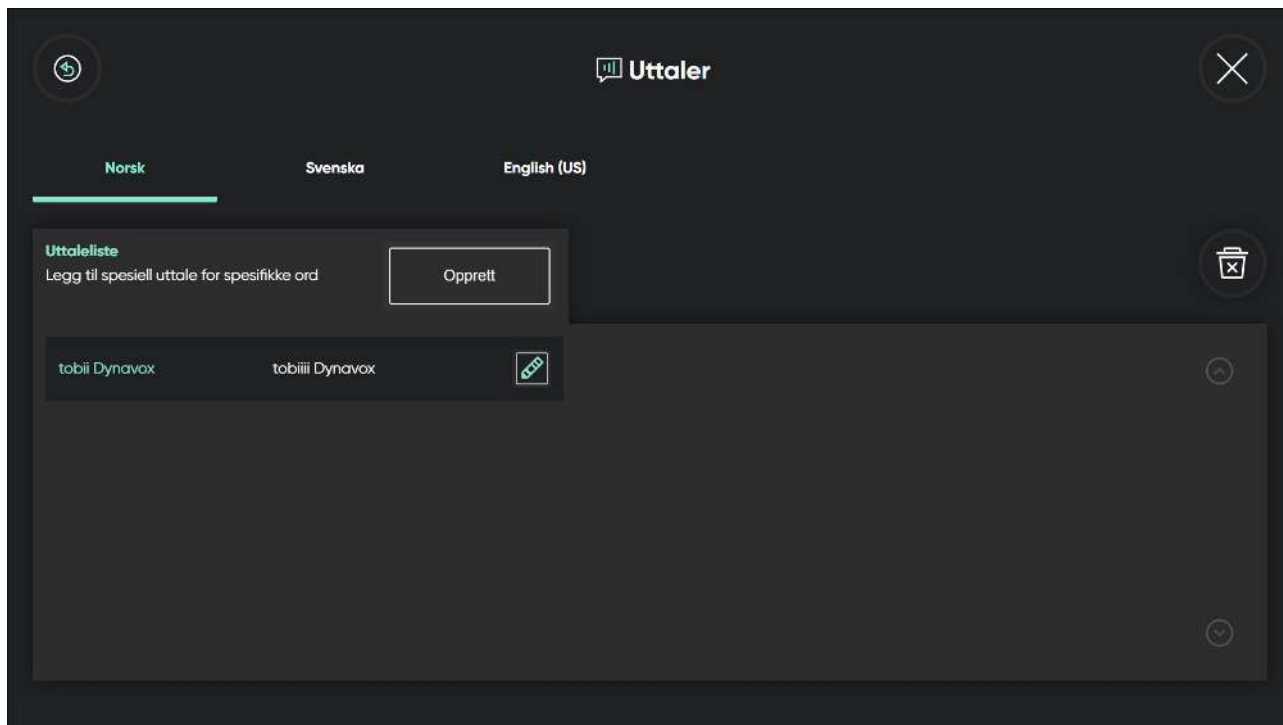

5.5.1.3.1 Hvordan oppretter jeg uttaleunntak i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.



2. Velg -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.



3. Velg handlingen (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.



4. Se etter -ikonet (Stemme) for å finne det riktige innstillingskortet.

5. Velg **Åpne**-knappen.

6. Se i avsnittet om **Stemmer**

7. Velg **Opprett**-knappen for Uttaler.

8. Velg **språk**-fanen for det installerte språket du vil legge til et uttaleunntak.

9. Velg **Opprett**-knappen.

10. I tekstboksen **Ord** skriver du inn ordet du vil opprette et uttaleunntak for.



11. Velg -ikonet ved siden av tekstboksen **Uttale**.

12. I tekstboksen **Uttale** skriver du inn hvordan du vil at ordet skal uttales.



Hvis du vil høre uttaleunntaket, velger du ved siden av tekstboksen Uttale..



13. Velg **Opprett**-knappen for å lagre uttaleunntaket.



14. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til Stemmeinnstillinger.



15. Velg knappen (Tilbake) for å gå tilbake til innstillingene for TD Talk.



16. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.5.2 Kontoer for Voice Banking

TD Talk kan koble til tre ulike Voice Banking-tjenester:

- Acapela MyOwnVoice



- ModelTalker



- The Voice Keeper



Brukeren trenger en konto og påloggningsdetaljer for en av disse leverandørene av Voice Banking-tjenester for å kunne koble til og bruke den personlige syntetiske stemmen.

5.5.2.1 Kontoer for Voice Banking

5.5.2.1.1 Hvordan bruker jeg stemmen min fra Voice Banking-tjenester?



Du må ha tilgang til Internett for å logge på Voice Banking-tjenesten.

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.



2. Velg -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.



3. Velg handlingen (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.



4. Se etter -ikonet (Stemme) for å finne det riktige innstillingskortet.

5. Velg **Apne**-knappen.

6. Se i avsnittet om **Kontoer for Voice Banking**.


Velg **Administrer**-knappen for Kontoer for Voice Banking.

7. Velg **Logg inn**-knappen i delen for Voice Banking-tjenesten din.

8. Skriv inn **brukernavnet** og **passordet**.

9. Velg **Logg inn**-knappen.

Den personlige stemmen lastes ned og velges automatisk som standard stemme for brukeren.

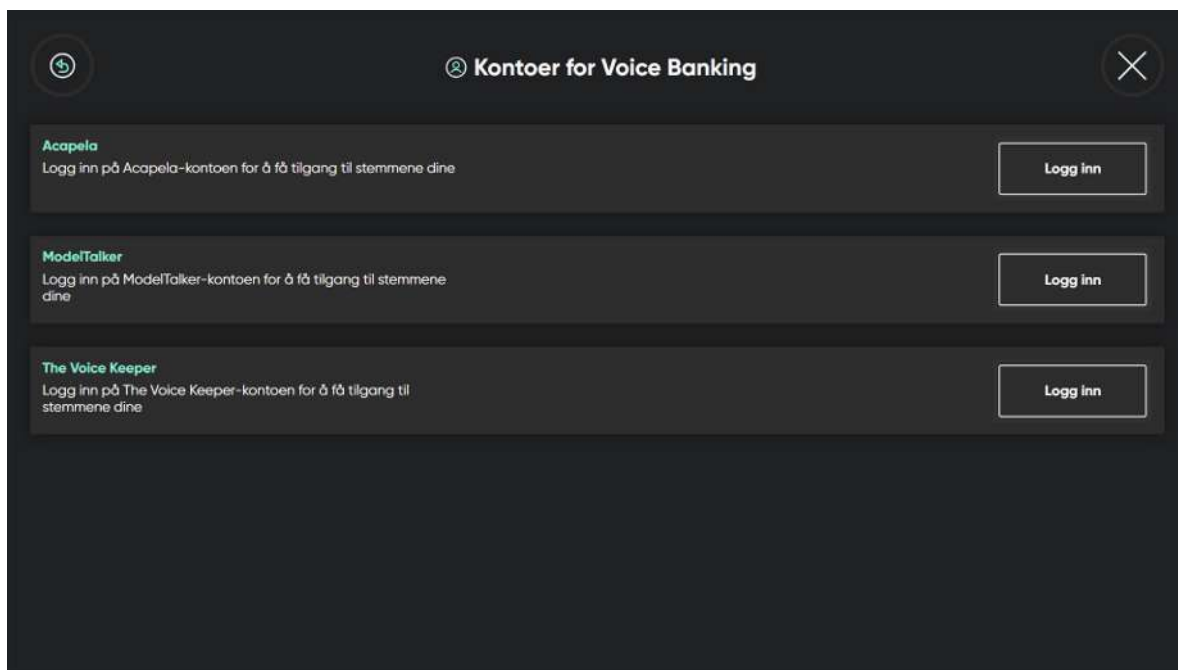

Dette er tilfelle når personlige syntetiske stemmer er tilgjengelige på flere språk



10. Velg (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til Stemmeinnstillinger.



11. Velg knappen (Tilbake) for å gå tilbake til innstillingene for TD Talk.




12. Velg (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.6

Enhet



Bare tilgjengelig på TD Pilot.

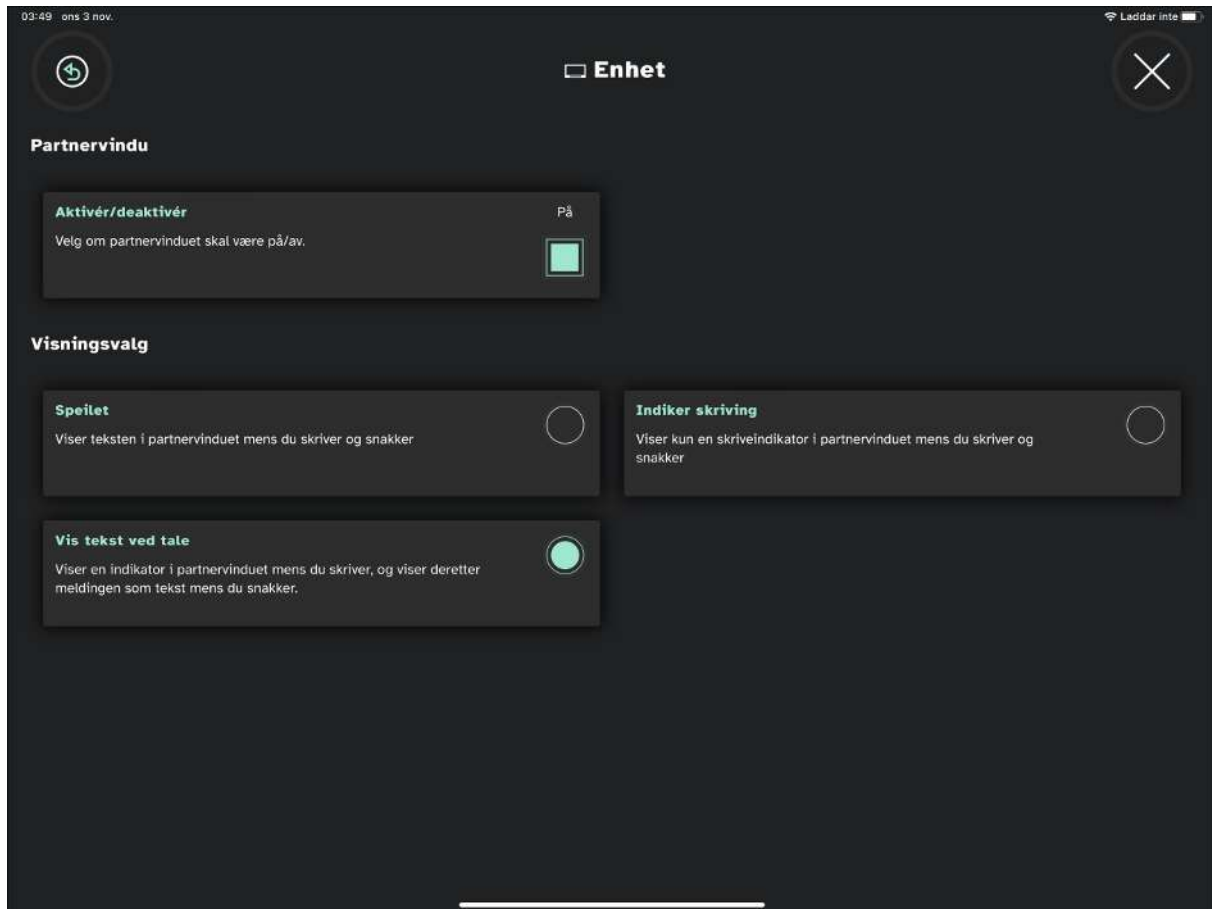

5.6.1 Partnervindu

5.6.1.1 Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg partnervinduet i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyingsenheten eller området til øyestyingsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3. Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.

4. Se etter  -ikonet (Enhet) for å finne det riktige innstillingskortet.

5. Velg **Åpne**-knappen.

6. Se i avsnittet om **Partnervindu**.

7. Veksle **Aktiver/deaktiver**-knappen for **Velg om partnervinduet skal være på/av** til:

- På
- Av

- Velg knappen  (Tilbake) for å gå tilbake til innstillingene for TD Talk.
- Velg knappen  (Lukk) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.6.1.2 Hvordan angir jeg visningsalternativene for partnervinduet i TD Talk?

- Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyingsenheten eller området til øyestyingsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

- Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

- Velg handlingen  (Innstillinger) for å åpne innstillingene for TD Talk.



- Se etter  -ikonet (Enhet) for å finne det riktige innstillingskortet.

- Velg **Åpne**-knappen.

- Se i avsnittet **Visningsvalg**.

- Velg en av følgende alternativknapper og velg visningsalternativet for partnervinduet:
 - Speilet – Viser teksten i partnervinduet mens du skriver og snakker.
 - Vis tekst ved tale – Viser en indikator i partnervinduet mens du skriver, og viser meldingen som tekst mens du snakker.
 - Indiker skrivning – Viser kun en skriveindikator i partnervinduet mens du skriver og snakker.

- Velg knappen  (Tilbake) for å gå tilbake til innstillingene for TD Talk.

- Velg knappen  (Lukk) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.7 Generelt

5.7.1 Programspråk

5.7.1.1 Hvordan angir jeg programspråk i TD Talk?

- Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyingsenheten eller området til øyestyingsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

- Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

- Velg  (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.

- Velg  (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

5. Velg  (Neste skjerm)-knappen på høyre side.
6. Se etter  (Generell)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
7. Velg **Åpne**-knappen.
8. Se i avsnittet om **Programspråk**.
9. Velg **Endre**-knappen.
10. Velg alternativknappen ved siden av språket du vil ha i programmet.
11. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.
12. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.7.2 Tekststørrelse

5.7.2.1 Hvordan endrer jeg tekststørrelse i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3. Velg  (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.

4. Velg  (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

5. Velg  (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

6. Se etter  (Generell)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
7. Velg **Åpne**-knappen.
8. Se i avsnittet om **Tekststørrelse**.
9. Velg alternativknappen for **Tekststørrelse** for en av de følgende verdiene:
 - **Standard** (standard)
 - Stor

10. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

11. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.7.3 Respons:

5.7.3.1 Hvordan sender jeg tilbakemelding til Tobii Dynavox i TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.
3. Velg  (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.
4. Velg  (Neste skjerm)-knappen på høyre side.
5. Velg  (Neste skjerm)-knappen på høyre side.
6. Se etter  (Generell)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
7. Velg **Åpne**-knappen.
8. Se i **Tilbakemelding**-avsnitt.
9. Velg **Tilbakemelding**-knappen.
10. Bruk **Tastaturet** til å skrive inn e-postadressen din.
11. Velg  -knappen for tekstfeltet Emne.
12. Bruk **Tastaturet** til å fylle inn emnet for e-posten.
13. Velg  -knappen for meldingstekstfeltet.
14. Bruk **Tastaturet** til å sende meldinger.
15. Velg  -knappen for å lukke meldingstekstfeltet.
16. Velg **Send tilbakemelding**-knappen for å sende tilbakemeldingen til Tobii Dynavox.
17. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.
18. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.7.4 Vilkår for bruk og personvernerklæring

5.7.4.1 Hvordan åpner man Tjenestevilkår

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyringsenheten eller området til øyestyringsenheten.

1.  -knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.
2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.
3. Velg  (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.
4. Velg  (Neste skjerm)-knappen på høyre side.
5. Velg  (Neste skjerm)-knappen på høyre side.
6. Se etter  (Generell)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.
7. Velg **Åpne**-knappen.

8. Les gjennom avsnittet **Vilkår for bruk og personvernerklæring**.
9. Velg **Åpne**-knappen.

10. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

11. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.7.4.2 Hvordan åpner man personvernerklæringen

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyingsenheten eller området til øyestyingsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3. Velg  (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.

4. Velg  (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

5. Velg  (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

6. Se etter  (Generell)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.

7. Velg **Åpne**-knappen.

8. Les gjennom avsnittet **Vilkår for bruk og personvernerklæring**.

9. Velg **Åpne**-knappen.

10. Velg  (Forover)-knappen.

11. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

12. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

5.7.5 Innhent logger

5.7.5.1 Hvordan samler jeg logger for TD Talk?

1. Fokuser blikket nedenfor skjermen, i midten av øyestyingsenheten eller området til øyestyingsenheten.



-knappen (Kontrollpanel) vil bli synlig i delen nederst i midten av skjermen.

2. Velg  -knappen (Kontrollpanel) for å åpne Kontrollpanel.

3. Velg  (Innstillinger-handlingen) for å åpne TD Talk-innstillingene.

4. Velg  (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

5. Velg  (Neste skjerm)-knappen på høyre side.

6. Se etter  (Generell)-ikonet for å finne det riktige innstillingskortet.

7. Velg **Apne**-knappen.

Siden med generelle innstillinger åpnes.

8. Se i avsnittet om **Samling av logger**.

9. Velg **Logg**-knappen.

10. Velg **Ja**-knappen.

 Logger vil bli opprettet på skrivebordet.

11. Velg  (Tilbakeknappen) for å gå tilbake til TD Talk-innstillinger.

12. Velg  (Lukk-knappen) for å gå ut av TD Talk-innstillinger.

Copyright © Dynavox Group AB (Publ). Ikke alle produkter og tjenester tilbys i hvert lokale marked. Spesifikasjoner kan endres uten varsel på forhånd. Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.

Støtte for Tobii Dynavox-enheten

Få hjelp via internett

Besøke den produktspesifikke støttesiden for Tobii Dynavox-enheten din. Den inneholder oppdatert informasjon om problemer og tips og triks for produktet. Finn støttesidene våre på: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Kontakt din hjelpemiddelkonsulent eller forhandler

Kontakt din Tobii Dynavox-hjelpemiddelkonsulent eller autoriserte forhandler for hjelp hvis du har spørsmål eller problemer med produktet. De er best kjent med ditt personlige oppsett og er de som best kan hjelpe deg med tips og produktopplæring. For kontaktinformasjon se <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.