

TD Talk

Alle rechten voorbehouden



tobiidynavox

Alle rechten voorbehouden TD Talk

Versie 1.8

2025-07-08

Alle rechten voorbehouden.

Copyright © Dynavox Group AB (publ)

Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke wijze dan ook (elektronisch, met gebruik van fotokopieën en opnamen of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De geclaimde copyright-bescherming omvat alle vormen van auteursrechtelijk beschermd materiaal en auteursrechtelijk beschermde informatie volgens de wet of hierin toegestaan, inclusief en niet beperkt tot materialen gegenereerd door de softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals schermweergaven en menu's.

De informatie in dit document is eigendom van Dynavox Group AB. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dynavox Group AB is verboden.

Producten waarnaar in dit document wordt verwezen kunnen handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. De uitgever en de auteur maken geen aanspraak op deze handelsmerken.

Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen in de voorbereiding van dit document, zijn de uitgever en de auteur niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen, noch voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in dit document of uit het gebruik van programma's en eventuele bijbehorende broncode. De uitgever en de auteur kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van winst of enige andere commerciële schade die direct of indirect is veroorzaakt of wordt vermeend te zijn veroorzaakt door dit document.

De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Raadpleeg de Tobii Dynavox-website.

www.TobiiDynavox.com voor bijgewerkte versies van dit document.

Contactgegevens:

Dynavox Group AB
Löjtnantsgatan 25
115 50 Stockholm
Zweden
+46 8 522 950 20

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
VS
+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
Verenigd Koninkrijk
+44 (0)114 481 00 11

Tobii Dynavox Pty. Ltd.
Handelend als Link Assistive
11B MAB Eastern Promenade
Tonsley SA, 5042
Australië
+61 8 7120 6002

Tobii Dynavox (Suzhou) Co. Ltd
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP,
Suzhou
China 215021

+86 512 69362880




Inhoudsopgave

1	Welkom	6
1.1	Systeemvereisten	6
1.2	Ondersteunde talen	6
1.3	TD Suite verkrijgen	6
2	Middelen en ondersteuning	7
2.1	Bronnen en ondersteuning op internet.....	7
2.2	Leercentrum	7
3	Beginnen	8
3.1	Overzicht van TD Talk	8
3.2	Het offscreenmenu	9
3.2.1	Hoe open ik het offscreenmenu in TD Talk?	9
3.3	Het Dashboard	10
3.3.1	Hoe open ik het dashboard in TD Talk?	10
3.3.2	Hoe sluit ik TD Talk af?	10
3.4	TD Talk instellen	11
4	TD Talk gebruiken	13
4.1	Het toetsenbord gebruiken	13
4.2	Voorspellingen gebruiken	13
4.2.1	Woordvoorspellingen	13
4.2.2	Zinvoorspelling	14
4.3	Een bericht bewerken	14
4.3.1	Hoe bewerk ik een bericht in TD Talk?	14
4.4	Kopiëren en plakken	15
4.4.1	Hoe gebruik ik kopiëren in TD Talk?	15
4.4.2	Hoe gebruik ik plakken in TD Talk?	15
4.5	Korte berichten gebruiken	15
4.5.1	Hoe gebruik ik korte berichten in TD Talk?	15
4.5.2	Hoe wijzig ik het onderwerp voor Korte berichten?	16
4.6	De taal wijzigen	17
4.6.1	Hoe verander ik de spreektaal in TD Talk?	17
4.7	Gesprek	17
4.8	Zie Doorkijkmodus	18
4.8.1	Hoe start ik de doorkijkmodus?	18
4.8.2	Hoe beëindig ik de doorkijkmodus?	18
4.9	Hoe gebruik ik uitbreidingen voor afkortingen in TD Talk?	18
4.10	Hoe maak ik een actie ongedaan in TD Phone?	19
5	TD Talk-instellingen	20
5.1	Mijn account.....	21
5.1.1	Wat is een myTobiiDynavox-account?	21
5.1.2	Een maak ik een myTobiiDynavox-account?	21
5.1.3	Hoe maak ik een back-up van mijn persoonlijke gegevens?	21
5.1.4	Hoe herstel ik mijn persoonlijke gegevens?	22

5.2	Activering	22
5.2.1	Activeringsmethode.....	23
5.2.1.1	Hoe selecteer ik mijn activeringsmethode in TD Talk?	23
5.2.2	Knoppen.....	24
5.2.2.1	Hoe wijzig ik de dweltijd voor het activeren van knoppen in TD Talk?.....	24
5.2.2.2	Hoe stel ik de dweltijd voor het activeren van knoppen in TD Talk fijn af?.....	24
5.2.3	Invoer wijzigen	25
5.2.3.1	Hoe stel ik een schakelaaringang in voor mijn schakelaar in TD Talk?.....	25
5.3	Toetsenbord.....	26
5.3.1	Activeringsmethode.....	26
5.3.1.1	Hoe selecteer ik mijn activeringsmethode voor het toetsenbord in TD Talk?.....	26
5.3.2	Knoppen.....	27
5.3.2.1	Hoe wijzig ik de dweltijd voor de toetsenbordknoppen in TD Talk?	27
5.3.2.2	Hoe stel ik de dweltijd voor het activeren van knoppen in TD Talk fijn af?.....	28
5.3.3	Voorspelling	28
5.3.3.1	Hoe wijzig ik de dweltijd voor de voorspellingsknoppen in TD Talk?.....	28
5.3.3.2	Hoe stel ik de dweltijd voor de voorspellingsknoppen in TD Talk fijn af?.....	29
5.3.4	Algemeen.....	29
5.3.4.1	Hoe voeg ik een nieuwe taal/toetsenbordtaal toe of hoe download ik deze in TD Talk?.....	29
5.3.4.2	Hoe selecteer en activeer ik de toetsenbordtalen die ik wil gebruiken/beschikbaar wil maken in TD Talk?.....	30
5.3.4.3	Hoe schakel ik geluidsfeedback in TD Talk in of uit?	30
5.4	Gesprekken.....	31
5.4.1	Onderwerpen	32
5.4.1.1	Hoe maak in een nieuw onderwerp in TD Talk?	32
5.4.1.2	Hoe wijzig ik de naam van een onderwerp in TD Talk?	32
5.4.1.3	Hoe maak ik een onderwerp privé in TD Talk?	33
5.4.1.4	Hoe selecteer ik de actieve onderwerpen in TD Talk?.....	33
5.4.1.5	Hoe verwijder ik in een onderwerp in TD Talk?.....	34
5.4.1.6	Hoe kan ik korte berichten bewerken in TD Talk?.....	34
5.4.1.7	Hoe voeg ik een kort bericht toe in TD Talk?	35
5.4.1.8	Hoe verwijder ik een kort bericht in TD Talk?.....	36
5.4.2	Uitbreidingen voor afkortingen	37
5.4.2.1	Hoe voeg ik een uitbreiding voor afkortingen toe in TD Talk?.....	37
5.4.2.2	Hoe bewerk ik een uitbreiding voor afkortingen in TD Talk?.....	38
5.4.2.3	Hoe verwijder ik een uitbreiding voor afkortingen in TD Talk?	38
5.5	Stem	39
5.5.1	Stemmen.....	40
5.5.1.1	Geïnstalleerde en downloadbare stemmen.....	40
5.5.1.1.1	Hoe download ik een nieuwe stem in TD Talk?	40
5.5.1.1.2	Hoe selecteer ik mijn stem in TD Talk?	41
5.5.1.1.3	Hoe kan ik een filter toepassen op de beschikbare stemmen in TD Talk?	41
5.5.1.2	Stemconfiguratie	42
5.5.1.2.1	Hoe wijzig ik mijn stem in TD Talk?.....	42
5.5.1.3	Uitspraken	43
5.5.1.3.1	Hoe maak ik uitspraakuitzonderingen in TD Talk?.....	44

5.5.2	Accounts voor Voice Banking	44
5.5.2.1	Accounts voor Voice Banking.....	45
5.5.2.1.1	Hoe kan ik mijn stem gebruiken vanuit mijn Voice Banking Service?	45
5.6	Apparaat	46
5.6.1	Partnervenster.....	46
5.6.1.1	Hoe schakel ik het partnervenster in TD Talk in of uit?.....	46
5.6.1.2	Hoe stel ik de weergaveopties voor het partnervenster in TD Talk?.....	47
5.7	Algemeen.....	47
5.7.1	Applicatietaal.....	47
5.7.1.1	Hoe stel ik mijn applicatietaal in TD Talk in?.....	47
5.7.2	Tekstgrootte	48
5.7.2.1	Hoe wijzig ik de tekstgrootte in TD Talk?	48
5.7.3	Feedback	49
5.7.3.1	Hoe verzend ik feedback naar Tobii Dynavox in TD Talk?	49
5.7.4	Servicevoorwaarden en privacyverklaring	49
5.7.4.1	Hoe open ik de servicevoorwaarden?	49
5.7.4.2	Hoe open ik de privacyverklaring?	50
5.7.5	Logboeken bijhouden	51
5.7.5.1	Hoe verzamel ik logboeken voor TD Talk?	51

1 Welkom

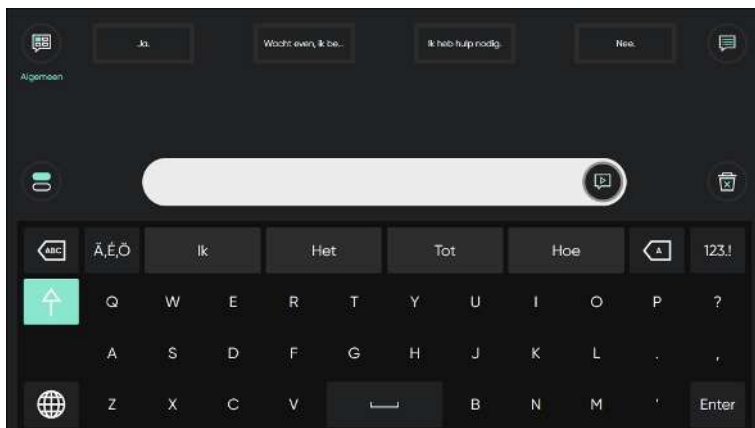

Afbeelding 1: TD Talk

Met TD Talk kunnen mensen op een zo vloeiend mogelijke manier laten weten wie ze zijn en wat ze willen zeggen. Deze is zodanig ontwikkeld dat u zo snel mogelijk een zin kunt opstellen. Met TD Talk kunnen personen die het gebruiken actief blijven deelnemen aan een gesprek. TD Talk ziet er vertrouwd uit en voelt vertrouwd aan, zodat personen die er gebruik van maken zo snel mogelijk aan de slag kunnen. Door de unieke zinspatronen en het woordgebruik van een persoon te leren, past TD Talk zich voortdurend aan om persoonlijk relevante opties voor communicatie aan te bieden.

1.1 Systeemvereisten

Tabel 1: iOS

	Besturingssysteem	Apparaat	Geheugen	Aanraken	Camera
Minimaal	iOS 15.1	iPad 7e generatie	4 GB	Geïntegreerde aanraking	Geïntegreerde camera
Aanbevolen	iOS 15.1	iPad 8e generatie	4 GB	Geïntegreerde aanraking	Geïntegreerde camera

1.2 Ondersteunde talen

- Deens (DK)
- Nederlands (NL)
- Engels (US)
- Frans (FR)
- Duits (DE)
- Italiaans (IT)
- Noors (NO)
- Spaans (Latijns-Amerika)
- Zweeds (SE)
- Binnenkort zijn er meer talen beschikbaar!

1.3 TD Suite verkrijgen

TD Talk is beschikbaar via TobiiDynavox.com voor Windows-apparaten en via de Apple App Store voor iPadOS.

2 Middelen en ondersteuning

Tobii Dynavox biedt verschillende gratis tools aan om uw ervaring met TD Talk te ondersteunen en aan te vullen. Vergeet deze tools niet. Ze zullen u helpen om uw Tobii Dynavox-software optimaal te gebruiken!

2.1 Bronnen en ondersteuning op internet

Als u ondersteuning nodig hebt, gaat u eerst naar het gedeelte Training en ondersteuning op de Tobii Dynavox-website.

2.2 Leercentrum



Het Leercentrum is momenteel alleen in het Engels beschikbaar.

Ga naar tobiidynavox.com/support-training/ voor documentatie, training en andere tools, waaronder:

- antwoorden op veelgestelde vragen
- trainingsvideo's
- opgenomen webinars
- Online cursussen


3 Beginnen

Als TD Talk samen met een oogbesturingsmodule wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de kalibratie voor de oogbesturingsmodule actief is.

- iOS: gebruik de TD CoPilot-app voor het instellen van de oogbesturingsmodule.

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van TD Pilot.

3.1 Overzicht van TD Talk

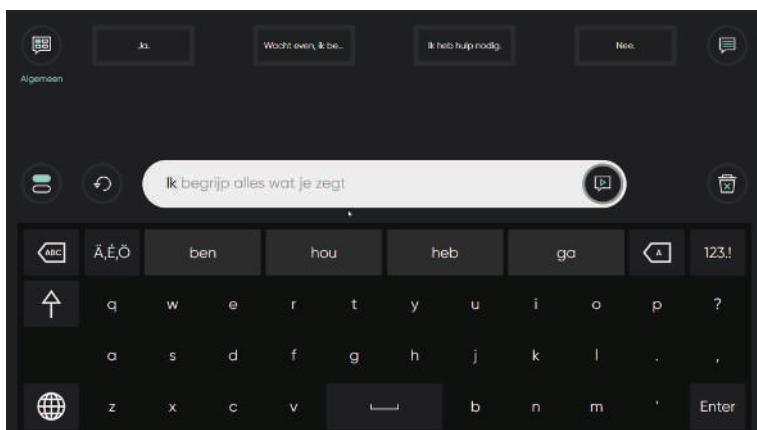


Afbeelding 2: TD Talk

Positie	Beschrijving	Positie	Beschrijving
1	Korte berichten Vooraf opgestelde berichten die onmiddellijk uitgesproken worden wanneer ze worden geselecteerd	8	Woordvoorspelling/uitbreidingen voor afkortingen Voorspelt automatisch woorden, gebaseerd op wat u tot nu toe getypt hebt. Bij gebruik van uitbreidingen voor afkortingen wordt het eerste woord vervangen door de uitbreiding.
2	Meer korte berichten Ga naar alle Korte berichten voor het huidige onderwerp.	9	Backspace Verwijdert het teken links van de cursor.
3	Berichtenvenster Bekijk en bewerk hier de tekst die u zou willen uitspreken.	10	Pagina Cijfers Toegang tot cijfers en speciale tekens.
4	Spreeken Spreekt de tekst uit in het Berichtenvenster. U kunt ook het uitspreken pauzeren en hervatten.	11	Taal wijzigen Schakelt tussen de talen die u spreekt.
5	Wissen Wist alle tekst in het Berichtenvenster.	12	Gesprek Schakel over naar een tweede berichtenvenster om een nieuw bericht op te stellen zonder de tekst in het eerste berichtenvenster te verliezen.
6	Zinvoorspelling TD Talk leert van wat u typt en gebruikt die informatie om zinnen te voorspellen. De voorspelling is gebaseerd op frequentie en kan communicatie sneller en persoonlijker maken.	13	Onderwerpen Organiseer uw Korte berichten op onderwerp. Schakel over naar een onderwerp om die berichten te openen.

Positie	Beschrijving	Positie	Beschrijving
7	Woord verwijderen Verwijdert het woord links van de cursor.	14	Ongedaan maken Maakt de acties in het berichtenvenster ongedaan.

3.2 Het offscreenmenu

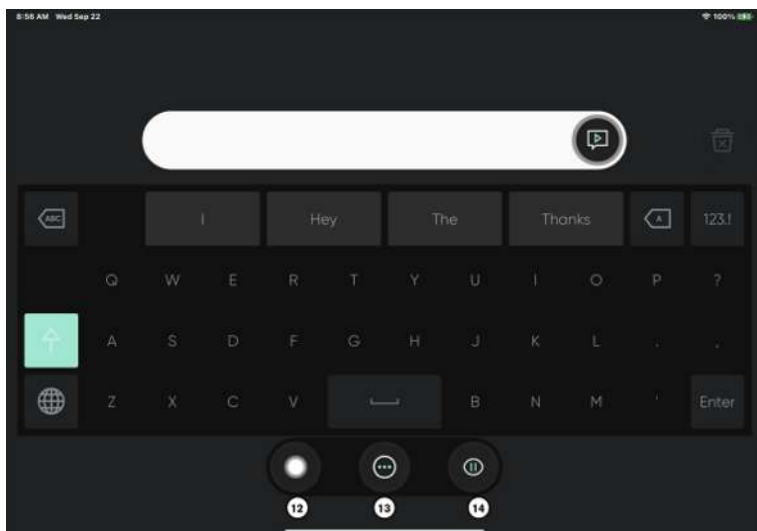

Afbeelding 3: Offscreenmenu van TD Talk


Positie	Beschrijving	Positie	Beschrijving
14	AssistiveTouch Schakelt AssistiveTouch in. Gebruik AssistiveTouch om naar het beginscherm en al uw andere apps te gaan.	16	Oogbesturing pauzeren/hervatten Schakelknop om oogbesturing tijdelijk te pauzeren en te hervatten.
15	Meer Gaat naar het Dashboard en Instellingen.	17	Zie Doorkijkmodus Maak de TD Talk-interface doorzichtig en zet de camera op de achterkant aan. Deze modus kan gebruikt worden om te zien wat er zich voor uw apparaat bevindt, zoals uw communicatiepartner, terwijl uTD Talk gebruikt.

3.2.1 Hoe open ik het offscreenmenu in TD Talk?

Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het offscreenmenu in TD Talk:

- **Als gebruiker:** Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.
- **Als zorgverlener:** Veeg omhoog vanaf de letter **T** op het TD Talk-toetsenbord.

3.3 Het Dashboard

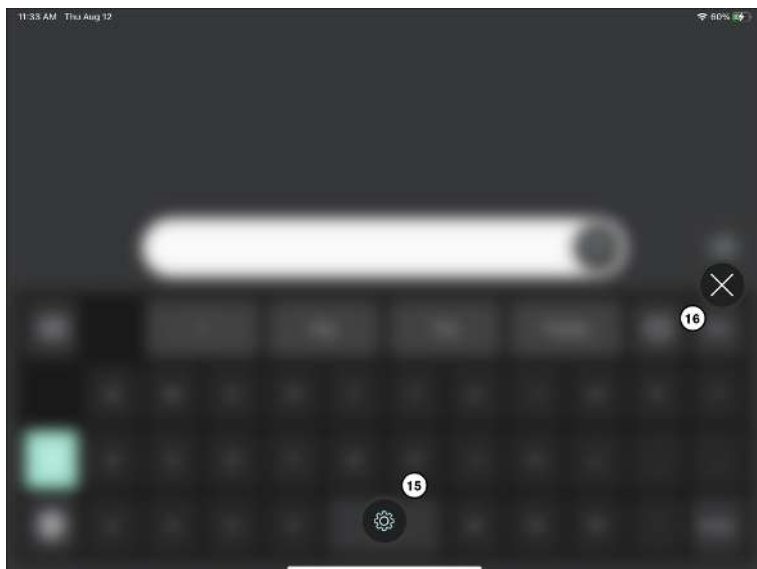

Afbeelding 4: TD Talk-dashboard

Positie	Beschrijving	Positie	Beschrijving
15	TD Talk-instellingen Zie 5 TD Talk-instellingen, pagina 20 voor meer informatie	16	Het dashboard afsluiten Selecteer de knop om het dashboard af te sluiten.

3.3.1 Hoe open ik het dashboard in TD Talk?

- U kunt de instellingen op een van de volgende manieren openen:
 - Als gebruiker:** Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.
 - Als zorgverlener:** Veeg omhoog vanaf de letter T op het TD Talk-toetsenbord.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

- Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.

3.3.2 Hoe sluit ik TD Talk af?

- U kunt de instellingen op een van de volgende manieren openen:
 - Als gebruiker:** Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.
 - Als zorgverlener:** Veeg omhoog vanaf de letter T op het TD Talk-toetsenbord.

De knop  (AssistiveTouch) wordt zichtbaar in het onderste middelste deel van het scherm.

- Selecteer de knop  (AssistiveTouch) om het AssistiveTouch-menu te openen.
- Selecteer de knop  (Startpagina) in het AssistiveTouch-menu.

3.4 TD Talk instellen

1. Selecteer de  TD Talk-app op het startscherm of het iPadOS-apparaat.
2. U kunt de instellingen op een van de volgende manieren openen:
 - **Als gebruiker:** Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.
 - **Als zorgverlener:** Veeg omhoog vanaf de letter T op het TD Talk-toetsenbord.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

3. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.
4. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
5. Stel de taal van de -TD Talk-applicatie in:

- Selecteer de knop  (Volgend scherm) aan de rechterkant.
- Zoek naar het pictogram  (Algemeen) om de juiste instellingenkaart te vinden.
- Selecteer de knop **Openen**.
- Kijk in het gedeelte **Applicatietaal**.
- Selecteer het keuzerondje naast de taal waarin u de applicatie wilt gebruiken.

- Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar de TD Talk-instellingen.
6. Selecteer de te gebruiken stemmen:

- Zoek naar het pictogram  (Stem) om de juiste instellingenkaart te vinden.
- Selecteer de knop **Openen**.
- Kijk in het gedeelte **Uw stemmen**.
- Selecteer het keuzerondje onder de geïnstalleerde taal die u wilt spreken.

 Als u de gewenste taal niet kunt vinden, gaat u naar *5.3.4.1 Hoe voeg ik een nieuwe taal/toetsenbordtaal toe of hoe download ik deze in TD Talk?*, pagina 29 *5.3.4.2 Hoe selecteer en activeer ik de toetsenbordtalen die ik wil gebruiken/beschikbaar wil maken in TD Talk?*, pagina 30.

- Selecteer het keuzerondje naast de gewenste stem in de lijst met beschikbare stemmen voor de te spreken taal. Gebruik de knoppen 'Omhoog bladeren' en 'Omlaag bladeren' aan de rechterkant om door de lijst met beschikbare stemmen voor de taal te bladeren.

 Selecteer  naast de stem om deze uit te proberen. Indien beschikbaar.

 Als u een  (download) in plaats van een keuzerondje ziet, selecteert u de knop om de stem te downloaden.

- Herhaal de laatste twee bovenstaande stappen als u in meer dan één taal wilt kunnen spreken.

7. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.




In TD Talk kunt u snel tussen de geselecteerde talen schakelen door de knop



linksonder op het toetsenbord te selecteren.

4 TD Talk gebruiken

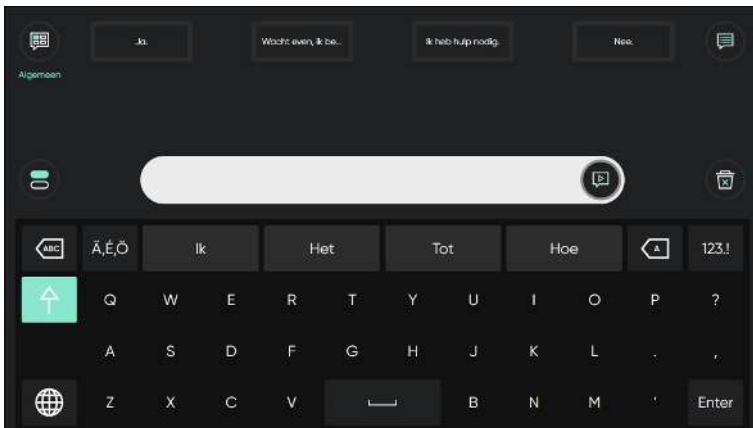

Afbeelding 5: TD Talk

4.1 Het toetsenbord gebruiken


Door letters op het toetsenbord te selecteren, kunnen woorden en zinnen worden geformuleerd (of gebouwd) in het berichtenvenster. Selecteer de knop  (Spreeken) wanneer u klaar bent om te spreken.

4.2 Voorspellingen gebruiken

TD Talk biedt zowel woordvoorspelling als zinsvoorspelling, waardoor er minder inspanning is vereist en/of er sneller berichten worden gegenereerd.

4.2.1 Woordvoorspellingen

De engine voor woordvoorspelling die in TD Talk wordt gebruikt, is afkomstig van SwiftKey™ en wordt vaak gebruikt op tablets en smartphones. SwiftKey™ maakt gebruik van verschillende technologieën voor kunstmatige intelligentie, waarmee het volgende woord dat de gebruiker wil typen, kan worden voorspeld. SwiftKey™ leert van eerdere teksten die de gebruiker heeft geschreven en biedt of toont presenteert voorspellingen op basis van de huidige invoertekst en wat deze heeft geleerd. De taal voor woordvoorspelling varieert naargelang de instelling van Toetsenbordtaal.

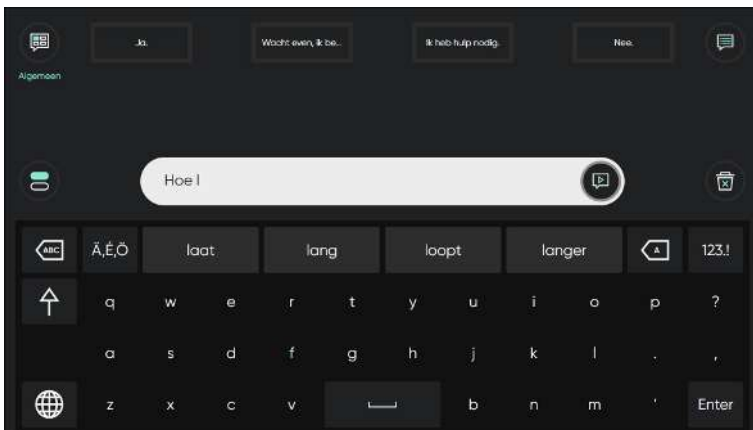


Wanneer u woordvoorspelling gebruikt, worden er vier (4) vakjes weergegeven boven het toetsenbord. Het uiterst linkse vakje geeft het meest waarschijnlijke voorspelde woord weer, en de overige drie (3) vakjes bevatten elk één voorspeld woord. U kunt een voorspeld woord selecteren door het betreffende vakje te selecteren. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, typt u gewoon verder, en het betreffende woord wordt na invoer van het volgende teken weergegeven.

Als u Woordvoorspelling gebruikt en een woord met een accent, zoals café, wilt typen, bespaart u tijd en moeite door het accent over te laten aan Woordvoorspelling. Typ gewoon 'cafe', en een van de suggesties is dan 'café'.

4.2.2 Zinvoorspelling


TD Talk leert en analyseert na verloop van tijd hoe u spreekt. Woordvoorspelling leert de woorden die u zegt. Zinsvoorspelling leert hoe u deze woorden samenvoegt tot een persoonlijke zinnenset. Wanneer u begint te typen, worden de voorspelde zinnen uit uw zinnenset in het grijs weergegeven in het Berichtenvenster.

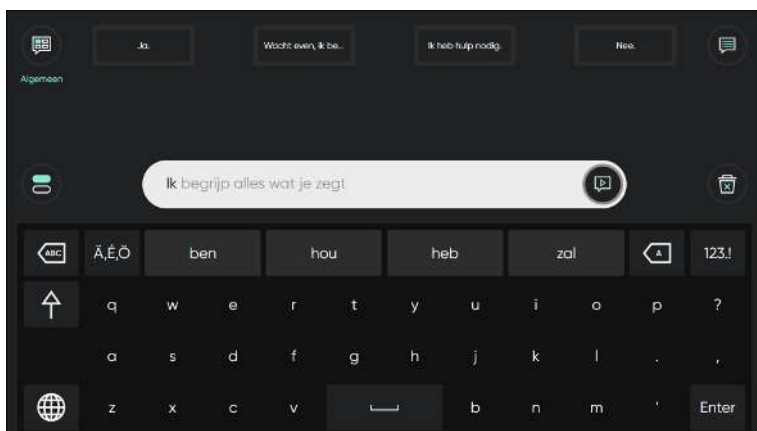

Kijk en richt de blik op het laatste woord in de voorspelde zin om de zin te selecteren. De kleur van de zin verandert van grijs naar zwart om aan te geven dat de zin is geselecteerd. De zin kan nu worden uitgesproken of bewerkt.

4.3 Een bericht bewerken

4.3.1 Hoe bewerk ik een bericht in TD Talk?

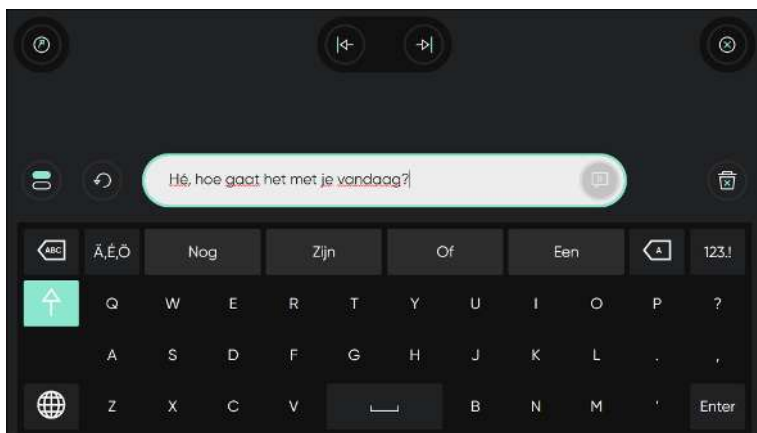

Afbeelding 6: Het menu Bewerken

1. Kijk naar de tekst in het berichtenvenster om deze te bewerken in het berichtenvenster. Het menu Bewerken wordt geopend.
2. Wanneer een woord is geselecteerd, typt u om het woord te vervangen, selecteert u een woord uit de woordvoorspelling of selecteert u Verwijderen.

Gebruik de pijlen  (Links) en  (Rechts) als de cursor niet op de juiste plaats staat.

3. Selecteer de knop  (Sluiten) om de Bewerkingsmodus te sluiten.

4.4 Kopiëren en plakken

4.4.1 Hoe gebruik ik kopiëren in TD Talk?

 De kopieerfunctie in TD Talk kopieert het volledige berichtvenster.

1. Kijk naar de tekst in het berichtenvenster om deze te bewerken in het berichtenvenster. Het menu Bewerken wordt geopend.

Selecteer de knop  (Kopiëren).

4.4.2 Hoe gebruik ik plakken in TD Talk?

1. Kijk naar het lege berichtenvenster. Het menu Kopiëren wordt geopend.

Selecteer de tool  (Plakken).
De boodschap wordt weergegeven in het berichtenvenster.

 U kunt tekst die gekopieerd is vanuit een tekstbron in elke andere software op uw apparaat plakken.

 In iOS wordt een pop-up van Apple weergegeven bij het plakken tussen toepassingen. Je kunt het elke keer toestaan met assistive touch OF de Apple-instellingen wijzigen om dit altijd toe te staan. TD Talk vraagt of u naar die instelling wilt gaan.

4.5 Korte berichten gebruiken

4.5.1 Hoe gebruik ik korte berichten in TD Talk?

Er zijn twee (2) soorten korte berichten. De eerste zijn altijd zichtbaar op het startscherm. De tweede bevinden zich


onder de knop  (Meer korte berichten).

Korte berichten op het startscherm

1. Selecteer **Korte berichten** te spreken.
Het geselecteerde bericht wordt onmiddellijk uitgesproken zonder dat het wordt toegevoegd aan het berichtenvenster en zonder dat het een bericht beïnvloedt dat u aan het bewerken bent.

Meer korte berichten

1. Selecteer de knop  (Meer korte berichten).

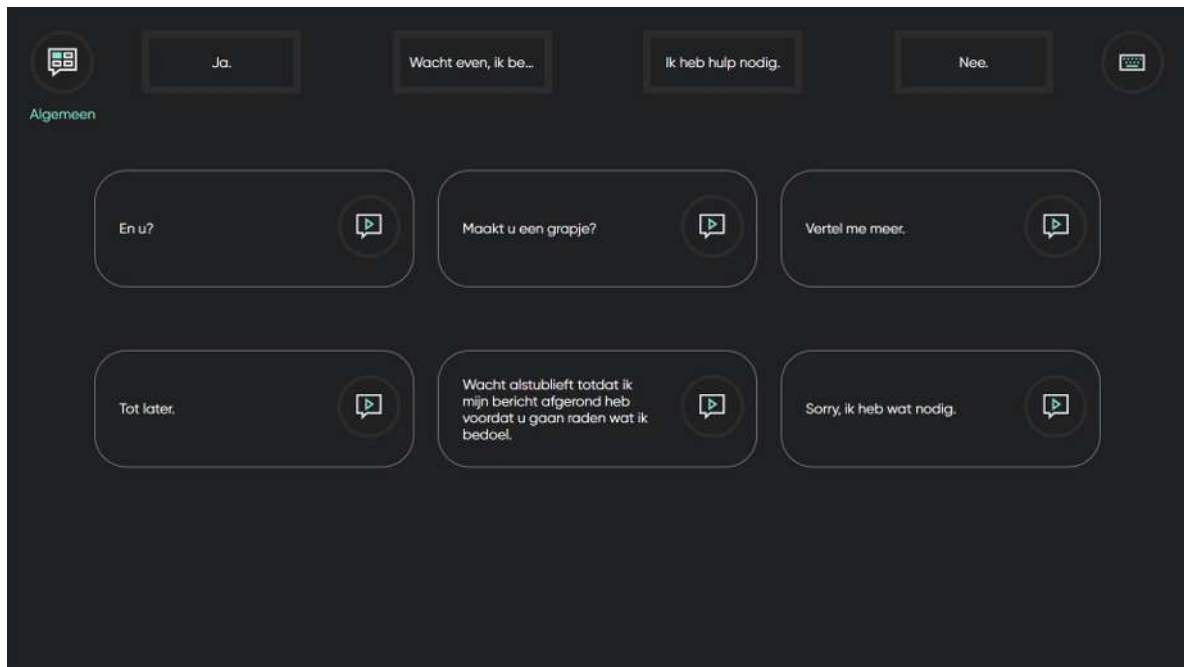

2. Selecteer de knop (Spreken) naast het bericht.




3. Selecteer de knop (Toetsenbord) om terug te keren naar het startscherm.

4.5.2 Hoe wijzig ik het onderwerp voor Korte berichten?



1. Selecteer de knop (menu Onderwerpen).
2. Selecteer het nieuwe onderwerp.

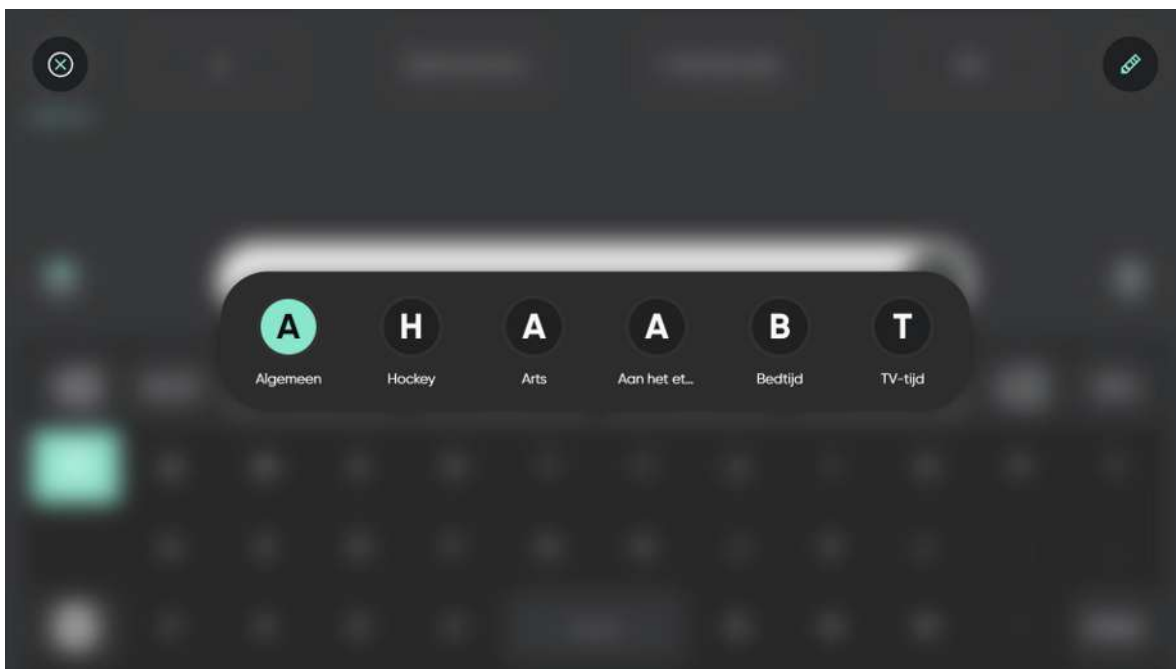

Selecteer de knop (Bewerken) om de weergegeven/beschikbare onderwerpen in het menu Onderwerpen te wijzigen. Zie 5.4.1 *Onderwerpen*, pagina 32 voor meer informatie.

4.6 De taal wijzigen

4.6.1 Hoe verander ik de spreektaal in TD Talk?



1. Selecteer de knop (Taal) op het toetsenbord.
2. Selecteer de te spreken taal

Zie 5.3.4.1 *Hoe voeg ik een nieuwe taal/toetsenbordtaal toe of hoe download ik deze in TD Talk?*, pagina 29 als de gewenste taal.



3. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan

4.7 Gesprek




Selecteer het pictogram (Chatten) om over te schakelen naar een tweede Berichtenvenster om een nieuw bericht op te stellen zonder de tekst in het eerste Berichtenvenster te verliezen.



Selecteer het pictogram (Teruggaan naar chat) om terug te gaan naar het eerste Berichtenvenster.

4.8 Zie Doorkijkmodus

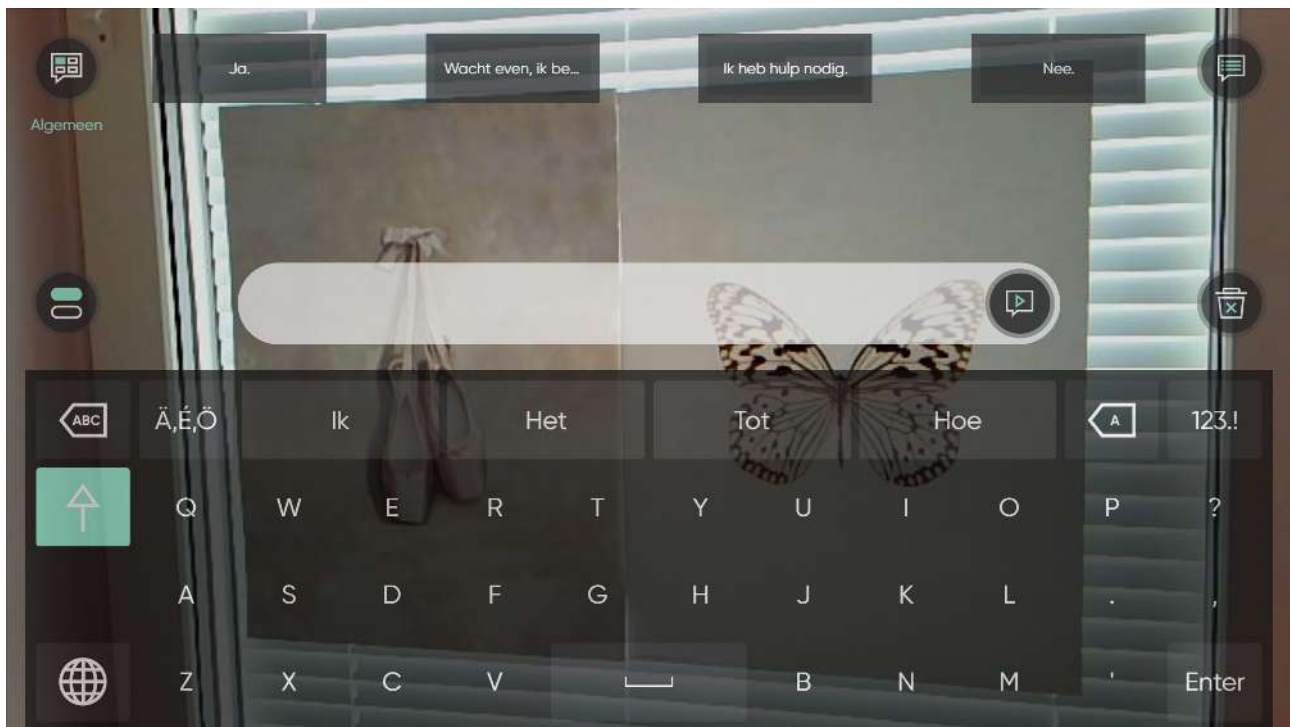

Maak de TD Talk-interface doorzichtig en zet de camera op de achterkant aan. Deze modus kan gebruikt worden om te zien wat er zich voor uw apparaat bevindt, zoals uw communicatiepartner, terwijl uTD Talk gebruikt.

4.8.1 Hoe start ik de doorkijkmodus?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.
Het Off-Screen Menu wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.



2. Selecteer de knop (Bewerkingsmodus).

4.8.2 Hoe beëindig ik de doorkijkmodus?


1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.
Het Off-Screen Menu wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.



2. Selecteer de knop (Doorkijkmodus beëindigen).

4.9 Hoe gebruik ik uitbreidingen voor afkortingen in TD Talk?

Wanneer u een bestaande afkorting typt, wordt de eerste positie in de woordvoorspellingen gewijzigd in Uitbreiding voor afkortingen.

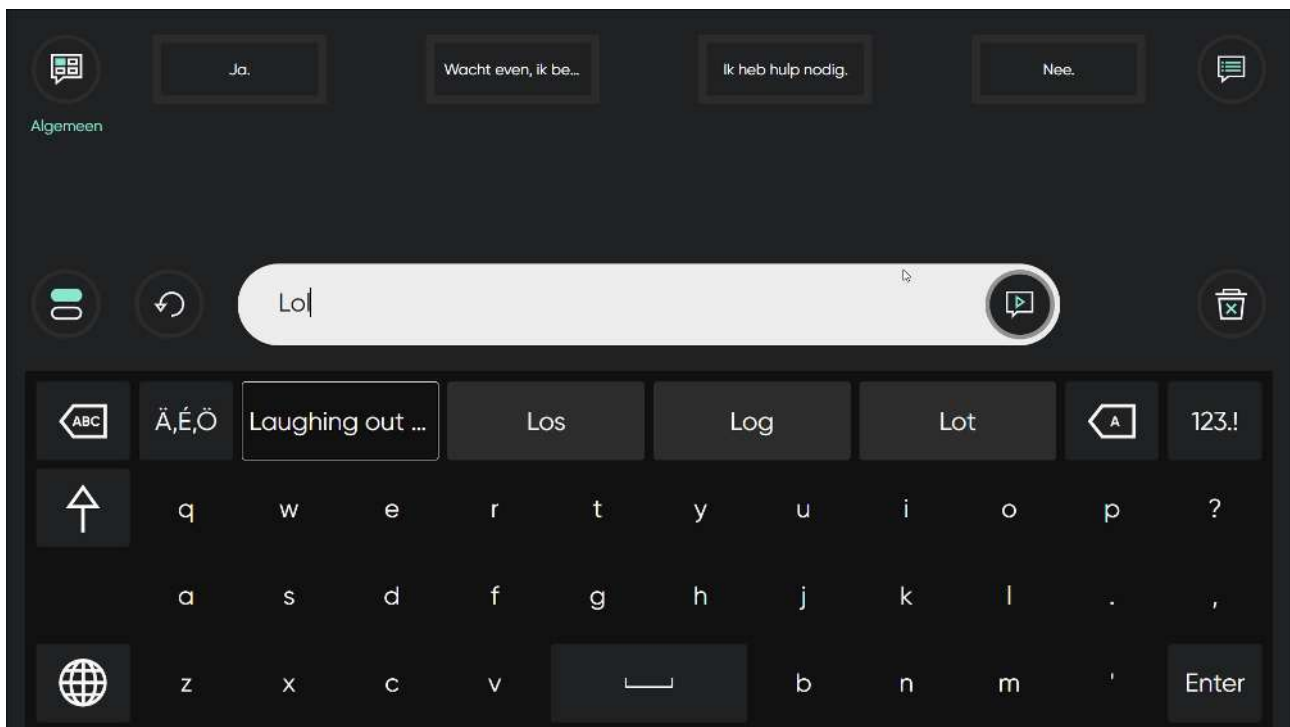


Selecteer de uitbreidingen voor afkortingen in het woordvoorspellingsgebied om de afkorting uit te breiden in het berichtenvenster.

Voor meer informatie over het toevoegen, bewerken en verwijderen van uitbreidingen voor afkortingen, gaat u naar [Uitbreidingen voor afkortingen](#).

4.10 Hoe maak ik een actie ongedaan in TD Phone?

Selecteer de knop  (Ongedaan maken) naast het berichtenvenster om de acties die u in het berichtenvenster hebt uitgevoerd wanneer u begon te typen in het actieve berichtenvenster, één voor één ongedaan te maken.

5 TD Talk-instellingen

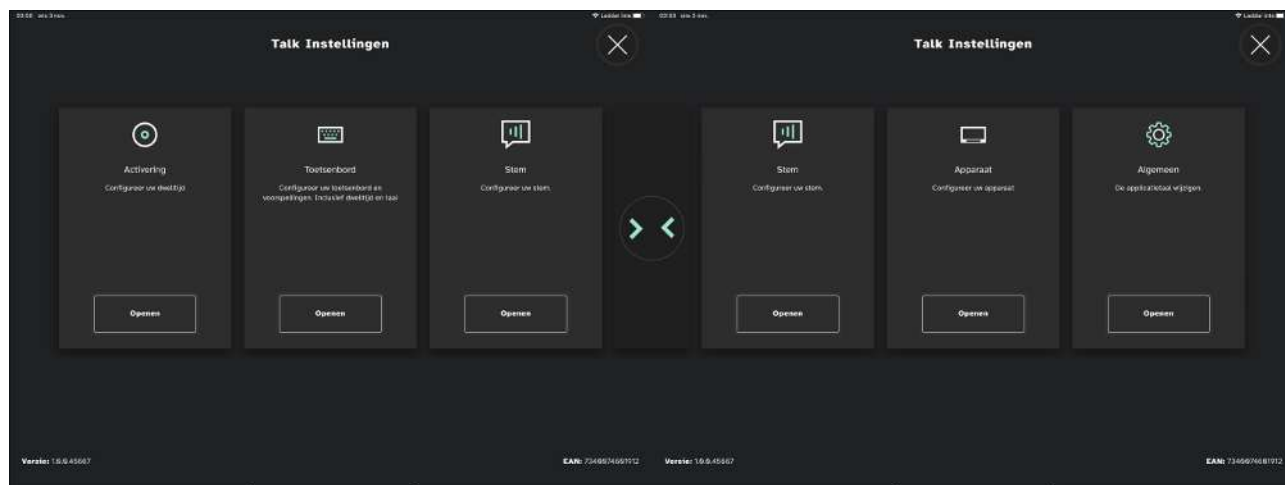

Pictogrammen	Actie	Beschrijving
	Activering	Alleen beschikbaar als een oogbesturingsmodule is geïnstalleerd en geactiveerd. Opent de instellingen voor Activering . Zie 5.2 <i>Activering</i> , pagina 22 voor meer informatie.
	Toetsenbord	Opent de instellingen voor Toetsenbord . Zie 5.3 <i>Toetsenbord</i> , pagina 26 voor meer informatie.
	Stem	Opent de instellingen voor Spraak . Zie 5.5 <i>Stem</i> , pagina 39 voor meer informatie.
	Apparaat	Opent de Apparaat -instellingen. Zie 5.6 <i>Apparaat</i> , pagina 46 voor meer informatie.
	Algemeen	Opent de Algemene instellingen. Zie 5.7 <i>Algemeen</i> , pagina 47 voor meer informatie.

5.1 Mijn account



Meld u aan met uw myTobiiDynavox Account om een back-up te maken van uw persoonlijke woordvoorspellingen, uitspraken, zinsvoorspellingen, onderwerpen en korte berichten tussen uw apparaten en deze te herstellen.

5.1.1 Wat is een myTobiiDynavox-account?

Een myTobiiDynavox Account is een onlineplatform aangeboden door Tobii Dynavox, een bedrijf gespecialiseerd in ondersteunende technologie voor personen met communicatie- en mobiliteitsuitdagingen. Via de myTobiiDynavox Account hebben gebruikers toegang tot verschillende hulpmiddelen, zoals gepersonaliseerde back-up en herstel van gegevens, software-updates, ondersteuningsmateriaal, gebruikersforums en online trainingscursussen. Deze doet ook dienst als centraal punt voor het beheren van apparaatinstellingen, het maken en delen van communicatieborden en toegang tot extra functies die zijn afgestemd op de behoeften van personen die Tobii Dynavox-apparaten gebruiken. In het algemeen is dit een centraal platform voor gebruikers om hun ondersteunende technologische oplossingen te beheren en ondersteuning te vinden binnen de Tobii Dynavox-gemeenschap.

5.1.2 Een maak ik een myTobiiDynavox-account?

Ga naar [Een myTobiiDynavox-account maken](#) om een myTobiiDynavox-account te maken.

5.1.3 Hoe maak ik een back-up van mijn persoonlijke gegevens?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.



De knop (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.



2. Selecteer de knop (Dashboard) om het Dashboard te openen.



3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.



4. Zoek het pictogram (Aanmelden) in de linkerbovenhoek van het scherm.
5. Gebruik het toetsenbord om uw gebruikersnaam in te voeren in het veld **Gebruikersnaam**.
6. Gebruik het toetsenbord om uw gebruikersnaam in te voeren in het veld **Wachtwoord**.
7. Selecteer de knop **Aanmelden**.
8. Selecteer de knop **Back-up**.
De datum waarop de back-up is gemaakt en vanaf welk apparaat wordt links van de knop Back-up weergegeven wanneer een back-up is gemaakt.



9. Selecteer de knop (Sluiten) om af te sluiten.

5.1.4 Hoe herstel ik mijn persoonlijke gegevens?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.



De knop (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.



2. Selecteer de knop (Dashboard) om het Dashboard te openen.



3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.



4. Zoek het pictogram (Aanmelden) in de linkerbovenhoek van het scherm.
5. Gebruik het toetsenbord om uw gebruikersnaam in te voeren in het veld **Gebruikersnaam**.
6. Gebruik het toetsenbord om uw gebruikersnaam in te voeren in het veld **Wachtwoord**.
7. Selecteer de knop **Aanmelden**.
8. Selecteer de knop **Herstellen**.
De datum waarop het herstel is uitgevoerd, wordt links van de knop Herstellen weergegeven wanneer een herstel is voltooid.




9. Selecteer de knop (Sluiten) om af te sluiten.

5.2

Activering



Alleen beschikbaar als een oogbesturingsmodule is geïnstalleerd en geactiveerd.

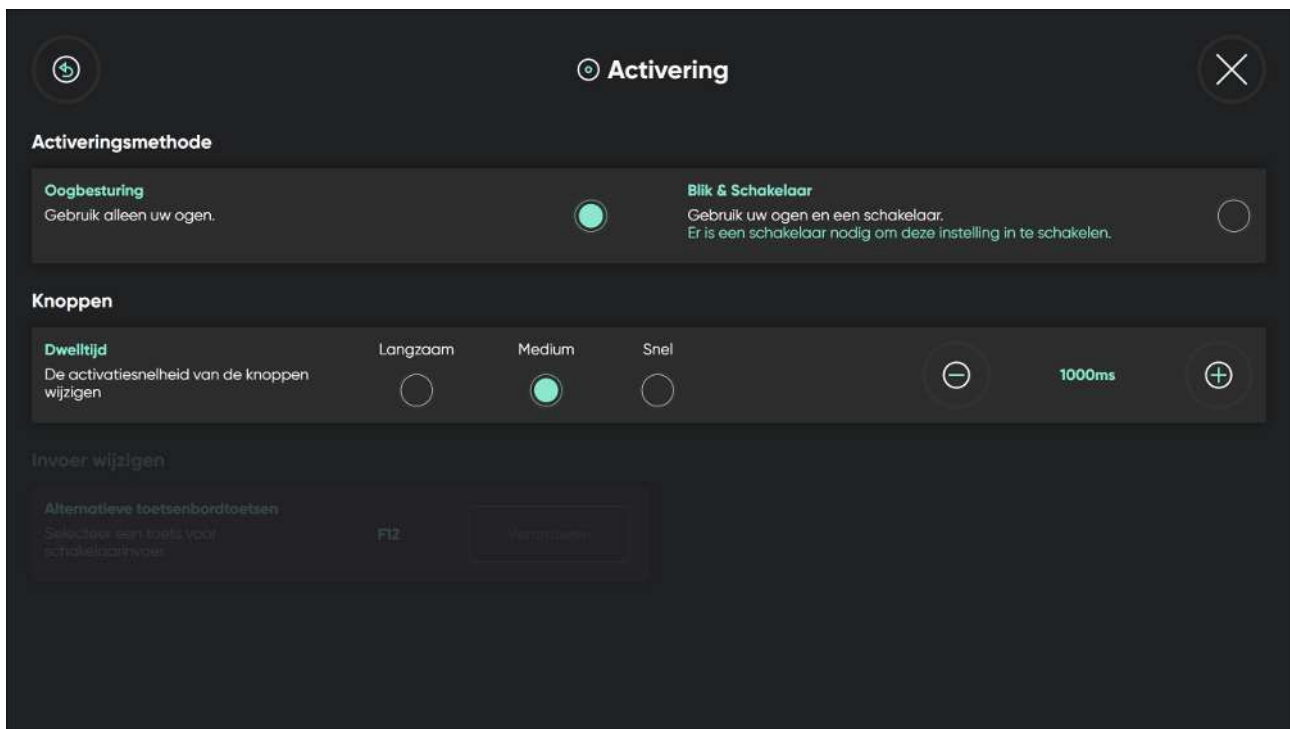

5.2.1 Activeringsmethode

5.2.1.1 Hoe selecteer ik mijn activeringsmethode in TD Talk?

 De selectie van Activeringsmethode voor Activering verwijst niet naar activering voor de toetsen op het toetsenbord, maar voor alle andere activeringen in TD Talk.

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram  (Activering) om de juiste instellingenkaart te vinden.

5. Selecteer de knop **Openen**.

6. Kijk in het gedeelte **Activeringsmethode**.

7. Selecteer het keuzerondje voor de te gebruiken **activeringsmethode** uit de volgende waarden:
 - **Gaze** - gebruik alleen uw ogen (standaard)
 - Blik en schakelaar - gebruik uw ogen en een schakelaar.

 Er is een schakelaar nodig om deze instelling in te schakelen.

8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

9. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.2.2 Knoppen

5.2.2.1 Hoe wijzig ik de dwelltijd voor het activeren van knoppen in TD Talk?



Knoppen verwijst niet naar de knoppen op het toetsenbord, maar naar de knoppen die zich op alle andere plaatsen in TD Talk bevinden.

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.



De knop (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.



3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.



4. Zoek naar het pictogram (Activering) om de juiste instellingenkaart te vinden.

5. Selecteer de knop **Openen**.

6. Kijk in het gedeelte **Knoppen**.

7. Selecteer het keuzerondje voor de **Dwelltijd** voor een van de volgende waarden:

- Langzaam
- **Gemiddeld** (standaard)
- Snel



8. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar de TD Talk-instellingen.



9. Selecteer de knop (Sluiten) om de TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.2.2.2 Hoe stel ik de dwelltijd voor het activeren van knoppen in TD Talk fijn af?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.



De knop (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.



3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.



4. Zoek naar het pictogram (Activering) om de juiste instellingenkaart te vinden.

5. Selecteer de knop **Openen**.

6. Kijk in het gedeelte **Knoppen**.

7. Selecteer een van de volgende toetsen om de **dwelltijd** fijn af te stellen:



- - om de dwelltijd te verlagen

-  - om de dweltijd te verhogen
De waarde kan worden gewijzigd tussen 200 ms en oneindig

8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar de TD Talk-instellingen.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om de TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.2.3 Invoer wijzigen

Some switches requires that a keyboard key is set for switch input.



Als er een schakelaaringang is ingesteld, werkt die toets op het toetsenbord ook als schakelaar als deze wordt geselecteerd op een aangesloten extern toetsenbord.



5.2.3.1 Hoe stel ik een schakelaaringang in voor mijn schakelaar in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Activering) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in de sectie **Invoer wisselen**.
7. Selecteer de knop **Wijzigen**.
8. Selecteer het keuzerondje voor de toets van het toetsenbord die moet worden gebruikt als **Invoer wisselen**.
9. Selecteer de knop **Ok** om te bevestigen of de knop **Annuleren** om te annuleren.
10. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
11. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.3 Toetsenbord

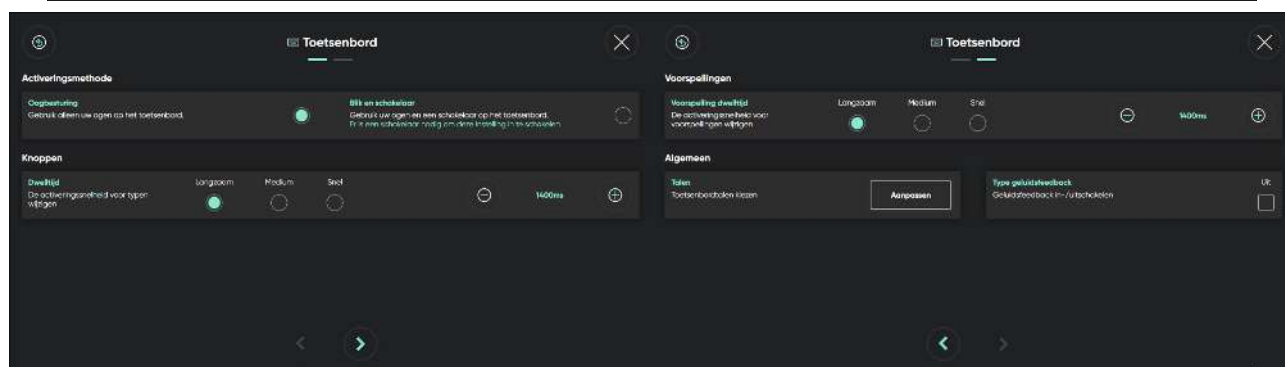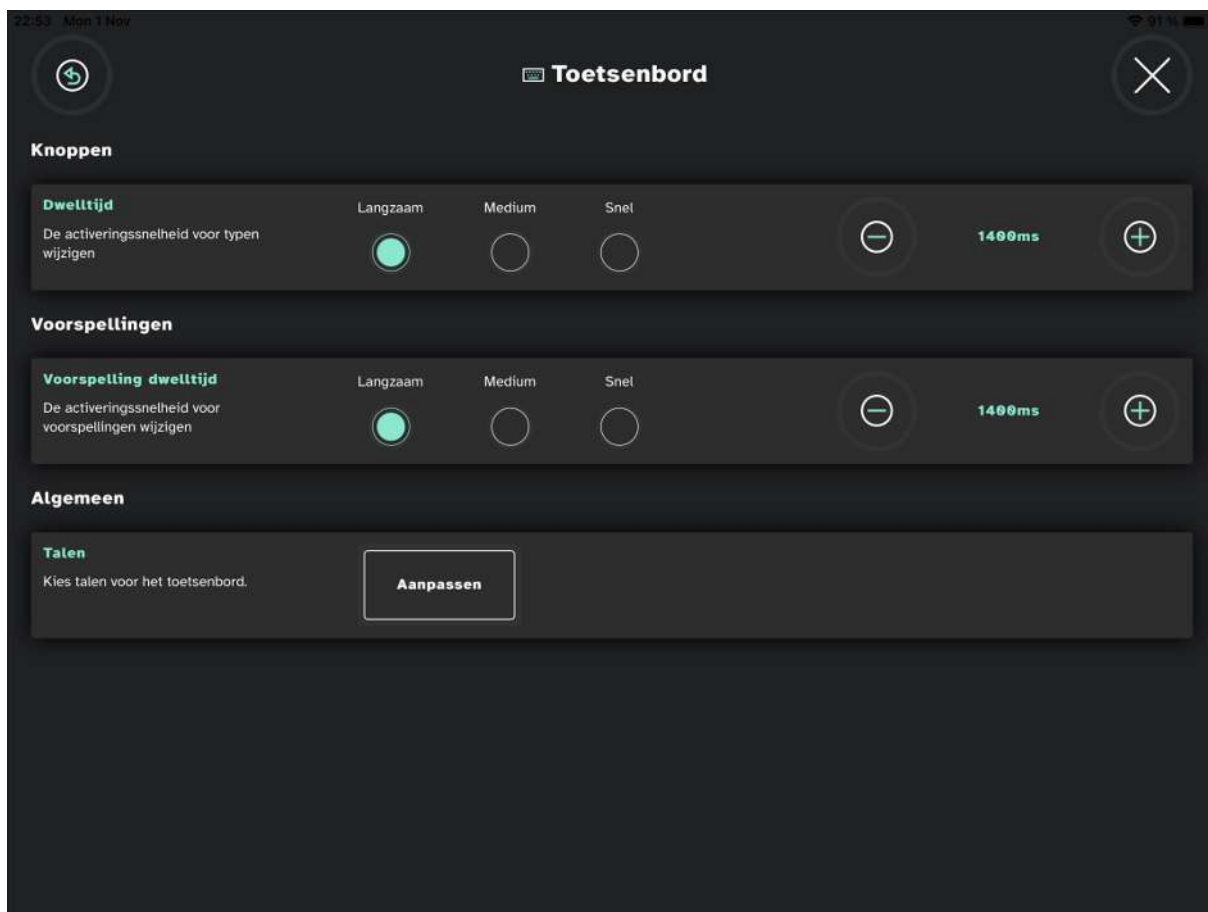

5.3.1 Activeringsmethode

5.3.1.1 Hoe selecteer ik mijn activeringsmethode voor het toetsenbord in TD Talk?



De selectie van activeringsmethode voor het toetsenbord verwijst alleen naar het activeren van knoppen op het toetsenbord in TD Talk.

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Activeringsmethode**.
7. Selecteer het keuzerondje voor de te gebruiken **activeringsmethode** uit de volgende waarden:
 - **Gaze** - gebruik alleen uw ogen (standaard)
 - Blik en schakelaar - gebruik uw ogen en een schakelaar.

 Er is een schakelaar nodig om deze instelling in te schakelen.

8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.3.2 Knoppen

5.3.2.1 Hoe wijzig ik de dweltijd voor de toetsenbordknoppen in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Knoppen**.
7. Selecteer het keuzerondje voor de **Dweltijd** voor een van de volgende waarden:
 - Langzaam
 - **Gemiddeld** (standaard)
 - Snel

8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar de TD Talk-instellingen.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om de TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.3.2.2 Hoe stel ik de dweltijd voor het activeren van knoppen in TD Talk fijn af?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Knoppen**.
7. Selecteer een van de volgende keuzerondjes om de **dweltijd** fijn af te stellen:

–  - om de dweltijd te verlagen

–  - om de dweltijd te verhogen

De waarde kan worden gewijzigd tussen 200 ms en oneindig

8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar de TD Talk-instellingen.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om de TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.3.3 Voorspelling

5.3.3.1 Hoe wijzig ik de dweltijd voor de voorspellingsknoppen in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Selecteer de knop  (Volgende pagina) onderaan het scherm.
7. Kijk in het gedeelte **Voorspelling**.
8. Selecteer het keuzerondje voor de **Dweltijd** voor een van de volgende waarden:
 - Langzaam
 - **Medium** (standaard)
 - Snel

9. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
10. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.3.3.2 Hoe stel ik de dweltijd voor de voorspellingsknoppen in TD Talk fijn af?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.

6. Selecteer de knop  (Volgende pagina) onderaan het scherm.
7. Kijk in het gedeelte **Voorspelling**.
8. Selecteer een van de volgende keuzerondjes om de **dweltijd** fijn af te stellen:

–  : om de dweltijd te verlagen

–  : om de dweltijd te verhogen

De waarde kan worden gewijzigd tussen 200 ms en oneindig

9. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
10. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.3.4 Algemeen

5.3.4.1 Hoe voeg ik een nieuwe taal/toetsenbordtaal toe of hoe download ik deze in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.

5. Selecteer de knop **Openen**.



6. Selecteer de knop (Volgende pagina) onderaan het scherm.

7. Kijk in het gedeelte **Algemeen**.

8. Selecteer de knop 'Toetsenbordtaal kiezen' **toevoegen/wijzigen** button.

9. Selecteer het tabblad **Downloaden**.



10. Selecteer de knop (Downloaden) naast de taal om het nieuwe toetsenbord te downloaden.

11. Selecteer de knop **Downloaden** om de download te starten of de knop **Annuleren** om de download te annuleren.

12. Selecteer het tabblad **Geïnstalleerd**.

13. Selecteer het keuzerondje naast de talen om de taal te activeren.



14. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.



15. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.3.4.2 Hoe selecteer en activeer ik de toetsenbordtalen die ik wil gebruiken/beschikbaar wil maken in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.



De knop (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.



2. Selecteer de knop (Dashboard) om Dashboard te openen.



3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.



4. Zoek naar het pictogram (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.

5. Selecteer de knop **Openen**.



6. Selecteer de knop (Volgende pagina) onderaan het scherm.

7. Selecteer de knop 'Toetsenbordtaal kiezen' **toevoegen/wijzigen** button.

8. Selecteer het tabblad **Geïnstalleerd**.

9. Selecteer het keuzerondje naast de talen om de toetsenbordtaal voor die talen te activeren.



Zorg ervoor dat u het keuzerondje selecteert voor alle talen waarvoor u een stem beschikbaar wilt hebben.



10. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.



11. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.3.4.3 Hoe schakel ik geluidsfeedback in TD Talk in of uit?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.




De knop (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.




2. Selecteer de knop (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Selecteer de knop  (Volgende pagina) onderaan het scherm.
7. Kijk in het gedeelte **Algemeen**.
8. Zet de **Aan/uit**-knop voor 'Type geluidsfeedback' op:
 - Aan
 - Uit
9. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
10. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.4 Gesprekken

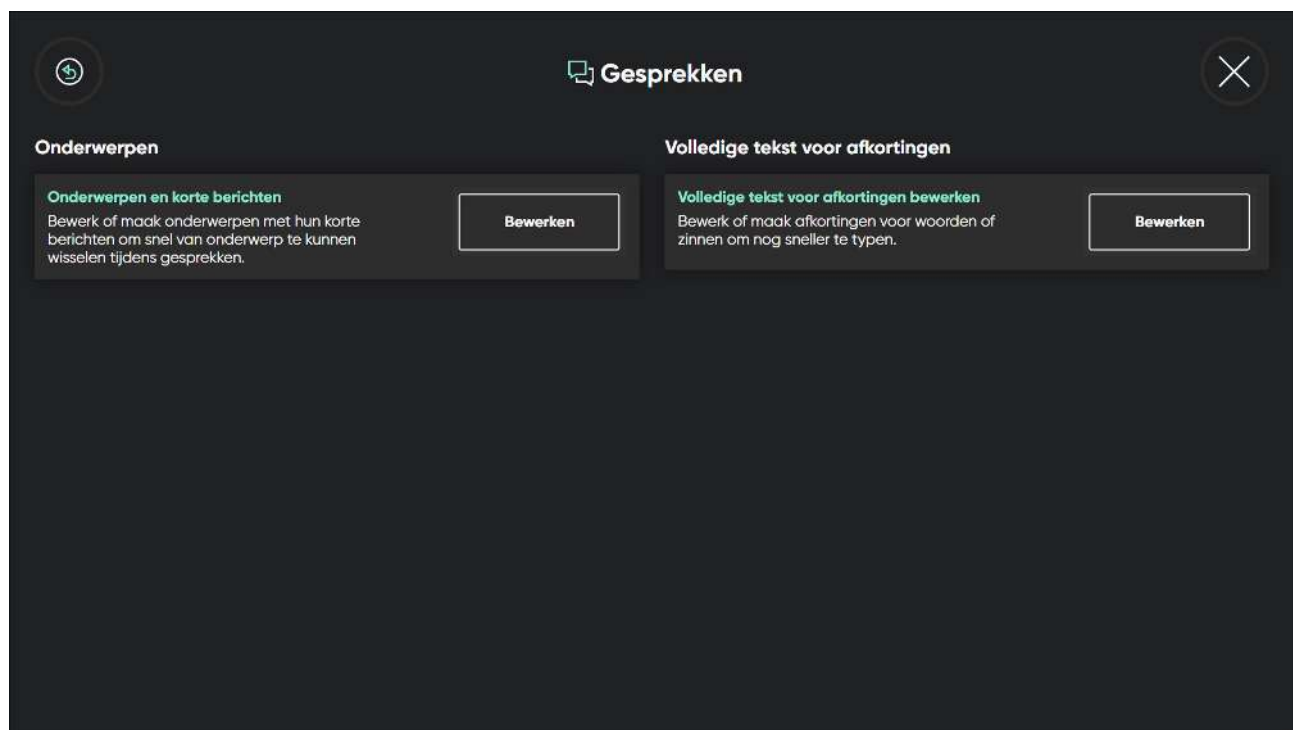

5.4.1 Onderwerpen

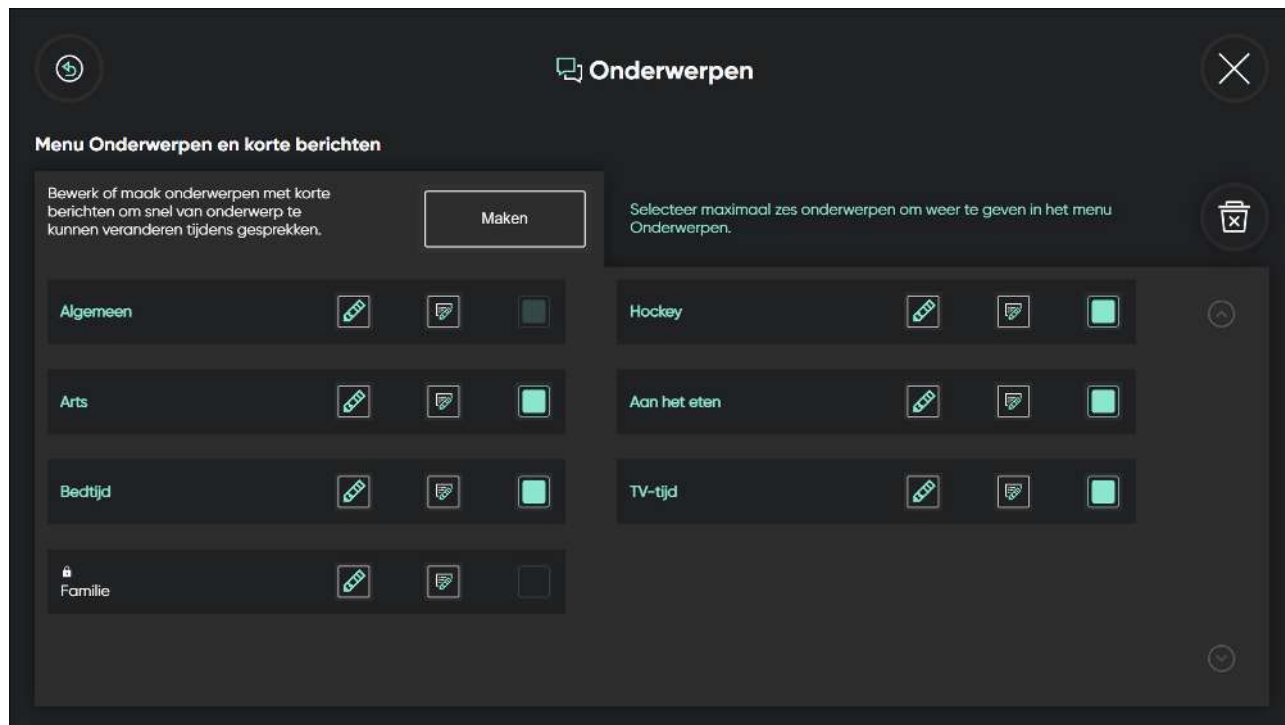

5.4.1.1 Hoe maak in een nieuw onderwerp in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram  (Activering) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Selecteer de knop **Maken**.
7. Gebruik het toetsenbord om het nieuwe onderwerp een naam te geven.

 Schakel het selectievakje **Privacymodus** in om het voorspellen en leren van zinnen uit te schakelen.

8. Selecteer het pictogram  (Opslaan) om op te slaan.

9. Selecteer de knop  (Sluiten) om af te sluiten.

5.4.1.2 Hoe wijzig ik de naam van een onderwerp in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Activering) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.

6. Selecteer de knop  (Bewerken) naast de naam van een onderwerp.
7. Gebruik het toetsenbord om de naam van het onderwerp te wijzigen.

 Schakel het selectievakje **Privacymodus** in om het voorspellen en leren van zinnen uit te schakelen.

8. Selecteer het pictogram  (Opslaan) om op te slaan.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om af te sluiten.

5.4.1.3 Hoe maak ik een onderwerp privé in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Activering) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Selecteer de knop  (Bewerken) naast de naam van een onderwerp.
7. Schakel het selectievakje **Privacymodus** in om het voorspellen en leren van zinnen uit te schakelen.
8. Selecteer het pictogram  (Opslaan) om op te slaan.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om af te sluiten.

5.4.1.4 Hoe selecteer ik de actieve onderwerpen in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.
 3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
 4. Zoek naar het pictogram  (Gesprekken) om de juiste instellingenkaart te vinden.
 5. Selecteer de knop **Openen**.
 6. Selecteer de knop **Bewerken** voor Onderwerpen en Korte berichten in het gedeelte Onderwerpen.
 7. Selecteer het **selectievakje** voor het onderwerp dat actief moet zijn.
-  Er kunnen maximaal zes (6) onderwerpen worden geselecteerd en beschikbaar zijn in het menu Onderwerpen.
8. Selecteer de knop  (Afsluiten) om de bewerkingssweergave te sluiten.
 9. Selecteer de knop  (Toetsenbord) om terug te keren naar het startscherm.

5.4.1.5 Hoe verwijder ik in een onderwerp in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.
- De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.
2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.
 3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
 4. Zoek naar het pictogram  (Gesprekken) om de juiste instellingenkaart te vinden.
 5. Selecteer de knop **Openen**.
 6. Selecteer de knop **Bewerken** voor Onderwerpen en Korte berichten in het gedeelte Onderwerpen.
 7. Selecteer de knop  (Verwijderen).
 8. Selecteer de knop  (Verwijderen) naast het onderwerp dat u wilt verwijderen.
 9. Selecteer de knop **Verwijderen** om het onderwerp te verwijderen of de knop **Annuleren** om te annuleren.
 10. Selecteer de knop  (Gereed) als u klaar bent met verwijderen.
 11. Selecteer de knop  (Afsluiten) om de bewerkingssweergave te sluiten.
 12. Selecteer de knop  (Toetsenbord) om terug te keren naar het startscherm.

5.4.1.6 Hoe kan ik korte berichten bewerken in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Gesprekken) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Selecteer de knop **Bewerken** voor Onderwerpen en Korte berichten in het gedeelte Onderwerpen.
7. Selecteer de knop  (Korte berichten bewerken).
8. Selecteer de knop  (Bewerken) naast het te bewerken bericht.
9. Breng de wijzigingen in het bericht aan met het toetsenbord.
10. Selecteer de knop  (Opslaan) om de wijzigingen in het korte bericht op te slaan.
11. Selecteer de knop  (Afsluiten) om de bewerkingsweergave te sluiten.
12. Selecteer de knop  (Toetsenbord) om terug te keren naar het startscherm.

5.4.1.7 Hoe voeg ik een kort bericht toe in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Gesprekken) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Selecteer de knop **Bewerken** voor Onderwerpen en Korte berichten in het gedeelte Onderwerpen.
7. Selecteer de knop  (Korte berichten bewerken).
8. Selecteer de knop  (Toevoegen) naast Nieuwe locatie toevoegen.
U kunt maximaal drie (3) pagina's met Korte berichten voor elk onderwerp hebben.

Gebruik de  - en  -knoppen om door de pagina's te navigeren.

9. Schrijven het nieuwe bericht met het toetsenbord.

10. Selecteer de knop  (Opslaan) om het nieuwe Korte bericht op te slaan.
11. Selecteer de knop  (Afsluiten) om de bewerkingsweergave te sluiten.
12. Selecteer de knop  (Toetsenbord) om terug te keren naar het startscherm.


5.4.1.8 Hoe verwijder ik een kort bericht in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Gesprekken) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Selecteer de knop **Bewerken** voor Onderwerpen en Korte berichten in het gedeelte Onderwerpen.
7. Selecteer de knop  (Korte berichten bewerken).
8. Selecteer de knop  (Bewerken) naast het te verwijderen bericht.
9. Selecteer de knop  Bericht verwijderen.
10. Selecteer de knop  (Opslaan) om de wijzigingen in het korte bericht op te slaan.
11. Selecteer de knop  (Afsluiten) om de bewerkingsweergave te sluiten.
12. Selecteer de knop  (Toetsenbord) om terug te keren naar het startscherm.

5.4.2 Uitbreidingen voor afkortingen

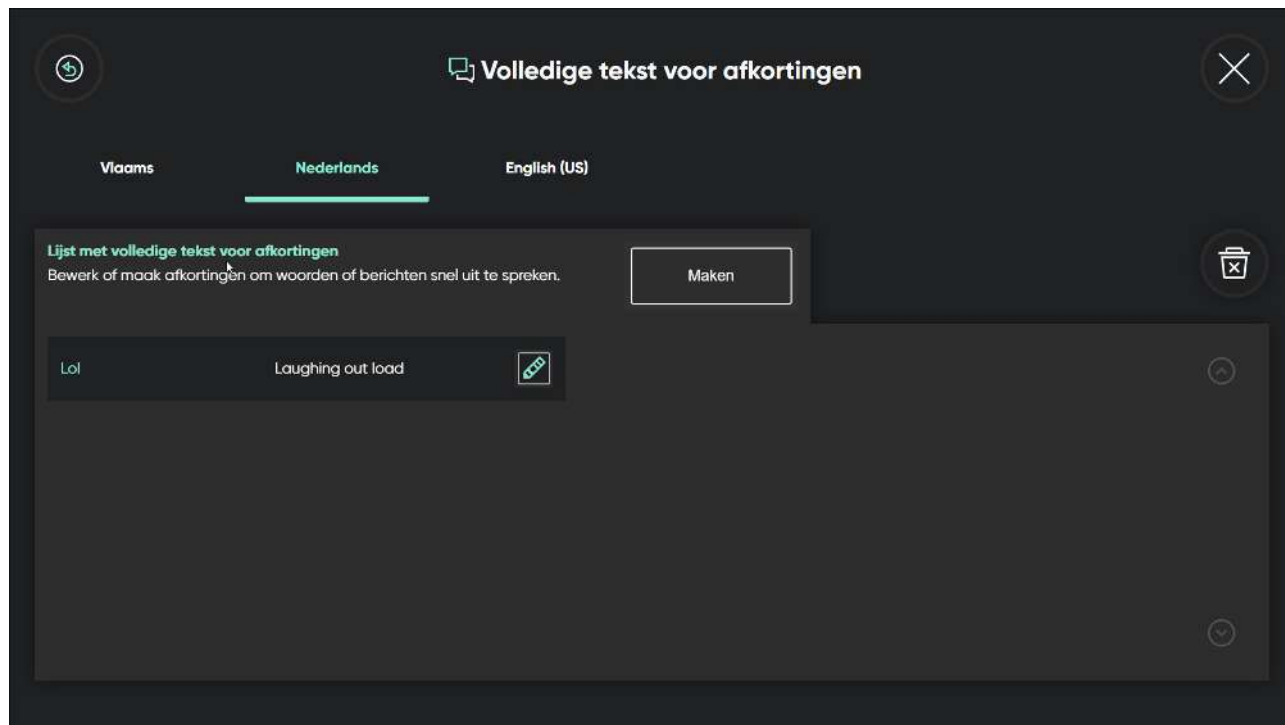

5.4.2.1 Hoe voeg ik een uitbreiding voor afkortingen toe in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Gesprekken) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Selecteer de knop **Bewerken** in het gedeelte Uitbreidingen voor afkortingen bewerken onder Uitbreidingen voor afkortingen.
7. Selecteer het tabblad **Taal** voor de geïnstalleerde taal waarvoor u een uitbreidingen voor afkortingen wilt toevoegen.
8. Selecteer de knop **Maken**.
9. Schrijf in het tekstvak **Afkorting** de afkorting die u wilt maken.
10. Selecteer het pictogram  naast het tekstvak **Woord of bericht**.
11. Schrijf in het tekstvak **Woord of bericht** het woord of bericht waarvoor u de afkorting hebt gemaakt.
12. Selecteer de knop  (Opslaan) om de wijzigingen op te slaan in Uitbreiding voor afkortingen.
13. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar Gesprekinstellingen.

14. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar de TD Talk-instellingen.
15. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.4.2.2 Hoe bewerk ik een uitbreiding voor afkortingen in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.
- De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.
2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Gesprekken) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Selecteer de knop **Bewerken** in het gedeelte Uitbreidingen voor afkortingen bewerken onder Uitbreidingen voor afkortingen.
7. Selecteer het tabblad **Taal** voor de geïnstalleerde taal waarvoor u een uitbreiding voor afkortingen wilt bewerken.
8. Selecteer het pictogram  naast de afkorting die u wilt bewerken.
9. Bewerk in het tekstvak **Afkorting** de nieuw afkorting die u wilt maken.
10. Selecteer het pictogram  naast het tekstvak **Woord of bericht**.
11. Bewerk in het tekstvak **Woord of bericht** het woord of bericht waarvoor u de afkorting hebt gemaakt.

12. Selecteer de knop  (Opslaan) om de wijzigingen op te slaan in Uitbreiding voor afkortingen.
13. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar Gesprekinstellingen.
14. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar de TD Talk-instellingen.
15. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.4.2.3 Hoe verwijder ik een uitbreiding voor afkortingen in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.
- De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.
2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.



4. Zoek naar het pictogram (Gesprekken) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Selecteer de knop **Bewerken** in het gedeelte Uitbreidingen voor afkortingen bewerken onder Uitbreidingen voor afkortingen.
7. Selecteer het tabblad **Taal** voor de geïnstalleerde taal waarvoor u een uitbreiding voor afkortingen wilt verwijderen.



8. Selecteer de knop (Verwijderen).



9. Selecteer de knop (Verwijderen) naast de afkorting die u wilt verwijderen.
10. Selecteer de knop **Verwijderen** om te bevestigen, of de knop **Annuleren** om te annuleren, waardoor de afkorting wordt verwijderd.



11. Selecteer de knop (Gereed) als u klaar bent met verwijderen.



12. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar Gesprekinstellingen.



13. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar de TD Talk-instellingen.




14. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.5

Stem



Stel hier de spraakstem van uw toetsenbordtalen in

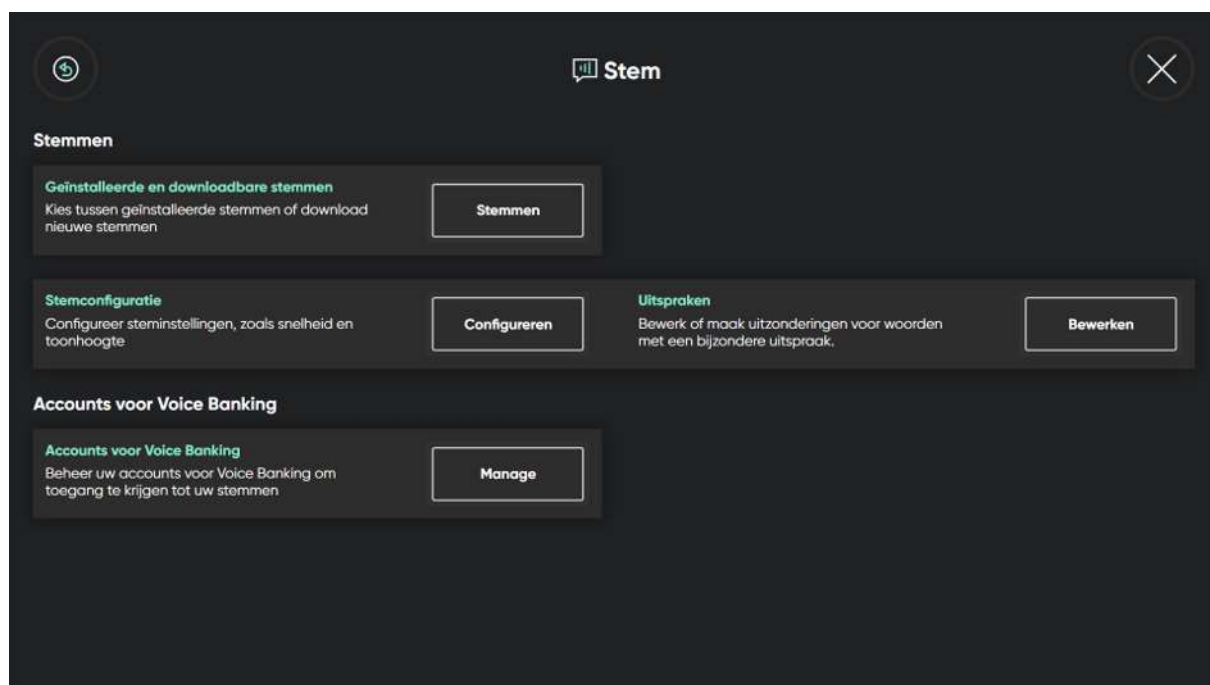

Alle geïnstalleerde talen worden weergegeven in het bovenste deel van het scherm. Als de taal is geselecteerd, worden de beschikbare stemmen voor die taal weergegeven in de lijst onder de talen. Om een stem uit te proberen, selecteert u



naast de stem om deze uit te proberen. Indien beschikbaar.

5.5.1 Stemmen

5.5.1.1 Geïnstalleerde en downloadbare stemmen

There are a lot of voices available within TD Talk, especially for some languages.

Filters can be applied to make it easier for the user to find their voice. For more information, see 5.5.1.1.3 *Hoe kan ik een filter toepassen op de beschikbare stemmen in TD Talk?*, pagina 41

5.5.1.1.1 Hoe download ik een nieuwe stem in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.



De knop (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop (Dashboard) om het Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram (Stem) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Stemmen**.
7. Selecteer de knop **Stemmen** voor geïnstalleerde en downloadbare stemmen.
8. Selecteer het tabblad **Downloaden**.
9. Selecteer het tabblad Taal voor de geïnstalleerde taal die u wilt spreken.



Als u de gewenste taal niet kunt vinden, gaat u naar 5.3.4.1 *Hoe voeg ik een nieuwe taal/toetsenbordtaal toe of hoe download ik deze in TD Talk?*, pagina 29 5.3.4.2 *Hoe selecteer en activeer ik de toetsenbordtalen die ik wil gebruiken/beschikbaar wil maken in TD Talk?*, pagina 30.



10. Selecteer de knop (Downloaden) naast de stem om de nieuwe stem te downloaden.
Gebruik de knoppen 'Omhoog bladeren' en 'Omlaag bladeren' aan de rechterkant om door de lijst met beschikbare stemmen voor de taal te bladeren.



Selecteer naast de stem om deze uit te proberen.

11. Selecteer de knop **Downloaden** om de download te starten of de knop **Annuleren** om de download te annuleren.
12. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar Steminstellingen.
13. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar de TD Talk-instellingen.
14. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.5.1.1.2 Hoe selecteer ik mijn stem in TD Talk?



De stemmen uit het Voice Banking-systeem bevatten het logo van de Voice Banking Service dat zichtbaar is achter de naam van de stem.

- Acapela MyOwnVoice 
- ModelTalker  ModelTalker
- The Voice Keeper 

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.



De knop (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop (Dashboard) om het Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram (Stem) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Stemmen**.
7. Selecteer de knop **Stemmen** voor geïnstalleerde en downloadbare stemmen.
8. Selecteer het tabblad Taal voor de geïnstalleerde taal die u wilt spreken.



Als u de gewenste taal niet kunt vinden, gaat u naar 5.3.4.1 *Hoe voeg ik een nieuwe taal/toetsenbordtaal toe of hoe download ik deze in TD Talk?*, pagina 29 5.3.4.2 *Hoe selecteer en activeer ik de toetsenbordtalen die ik wil gebruiken/beschikbaar wil maken in TD Talk?*, pagina 30.

9. Selecteer de gewenste stem in de lijst met beschikbare stemmen voor de te spreken taal. Gebruik de knoppen 'Omhoog bladeren' en 'Omlaag bladeren' aan de rechterkant om door de lijst met beschikbare stemmen voor de taal te bladeren.



Selecteer naast de stem om deze uit te proberen.

10. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar Steminstellingen.
11. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar de TD Talk-instellingen.
12. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.5.1.1.3 Hoe kan ik een filter toepassen op de beschikbare stemmen in TD Talk?


On the **Installed** or **Download** tab, do the following:



1. Selecteer de knop (Filter).
2. Schakel het selectievakje of de selectievakjes in naast de optie(s) die u wilt gebruiken.
U kunt kiezen uit het volgende:
 - Geslacht: Mannelijk, Vrouwelijk

- Leeftijd: Kind, Tiener en Volwassene

5.5.1.2 Stemconfiguratie

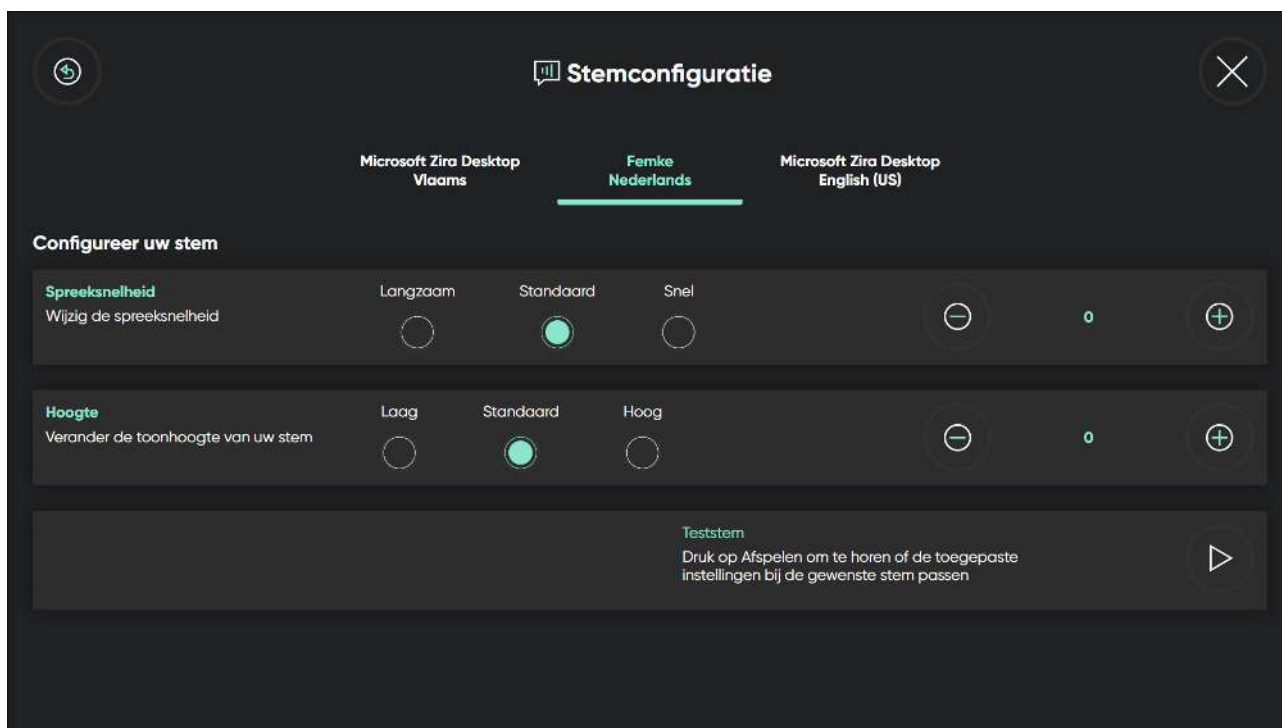

5.5.1.2.1 Hoe wijzig ik mijn stem in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram  (Stem) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.

6. Kijk in het gedeelte **Stemmen**
7. Selecteer de knop **Configureren** voor Stemconfiguratie.
8. Selecteer de stem die u wilt wijzigen uit de beschikbare stemmen.
9. Selecteer het keuzerondje voor de **Spreek snelheid** voor een van de volgende waarden:
 - Langzaam
 - **Standaard**
 - Snel
 om de spreek snelheid te wijzigen.

10. Selecteer een van de volgende keuzerondjes om de **spreek snelheid** fijn af te stellen:

-  : om de spreek snelheid te verlagen



– : om de spreesnelheid te verhogen

De waarde kan worden gewijzigd tussen -10 en +10.

11. Selecteer het keuzerondje voor de **Toonhoogte** voor een van de volgende waarden:

- Laag
- **Standaard**
- Hoog

om de toonhoogte van uw stem te wijzigen.



Om de nieuwe stem te beluisteren, selecteert u de  in de sectie Teststem.

12. Selecteer een van de volgende keuzerondjes om de **toonhoogte** fijn af te stellen:



– : om de toonhoogte te verlagen



– : om de toonhoogte te verhogen

De waarde kan worden gewijzigd tussen -10 en +10.



Om de nieuwe stem te beluisteren, selecteert u de  in de sectie Teststem.



13. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar Steminstellingen.




14. Selecteer de knop (Vorige) om terug te gaan naar de TD Talk-instellingen.



15. Selecteer de knop (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.5.1.3 Uitspraken

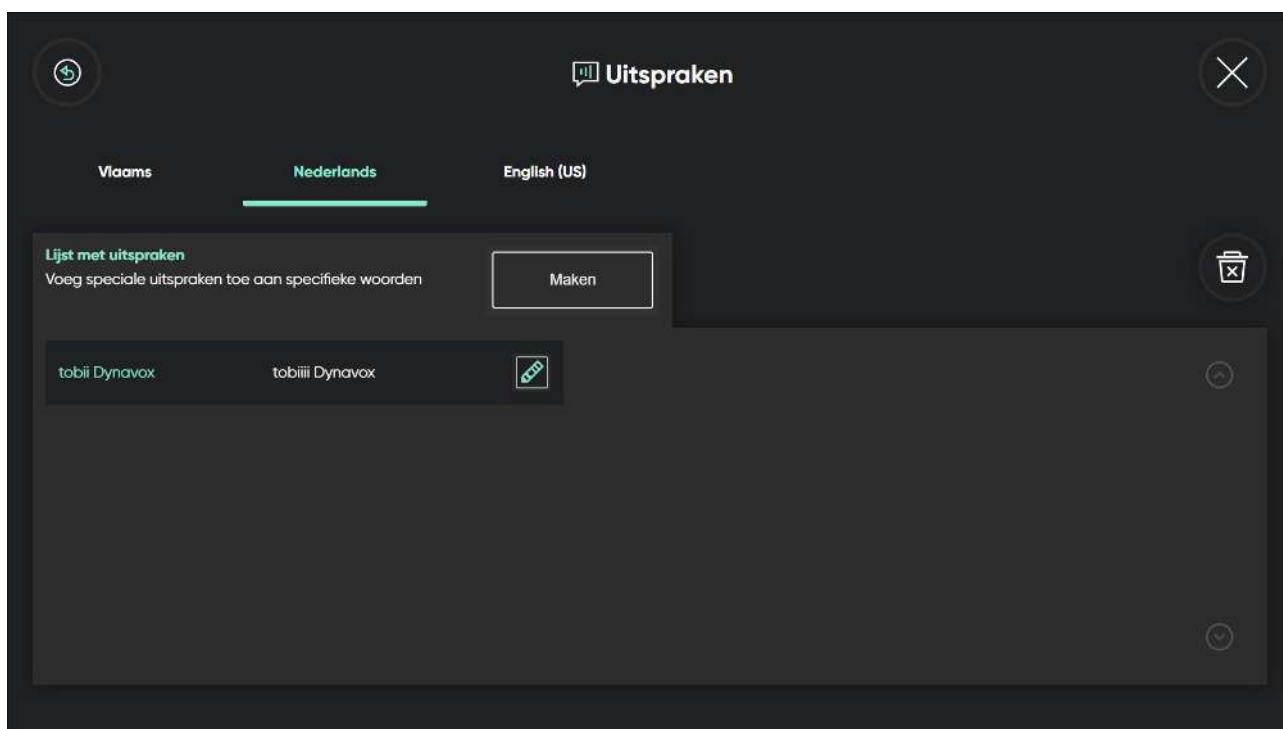

5.5.1.3.1 Hoe maak ik uitspraakuitzonderingen in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Stem) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Stemmen**
7. Selecteer de knop **Maken** voor Uitspreken.
8. Selecteer het tabblad **Taal** voor de geïnstalleerde taal waarvoor u de uitspraakuitzondering wilt maken.
9. Selecteer de knop **Maken**.
10. Schrijf in het tekstvak **Woord** het woord waarvoor u een uitspraakuitzondering wilt maken.
11. Selecteer het pictogram  naast het tekstvak **Uitspraak**.
12. Schrijf in het tekstvak **Uitspraak** hoe u het woord wilt uitspreken.

-  Om de uitspraakuitzondering te beluisteren, selecteert u de  naast het tekstvak Uitspraak.
13. Selecteer de knop **Maken** om uw uitspraakuitzondering op te slaan.

14. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar Steminstellingen.
15. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar de TD Talk-instellingen.
16. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.5.2 Accounts voor Voice Banking

TD Talk kan verbinding maken met drie verschillende Voice Banking Services:

- Acapela MyOwnVoice 
- ModelTalker  ModelTalker
- The Voice Keeper 

De gebruiker heeft een account en aanmeldgegevens nodig van een van deze aanbieders van voice banking services om verbinding te kunnen maken en een persoonlijke synthetische stem te kunnen gebruiken.

5.5.2.1 Accounts voor Voice Banking

5.5.2.1.1 Hoe kan ik mijn stem gebruiken vanuit mijn Voice Banking Service?

 Een internetverbinding is vereist om u aan te melden bij Voice Banking Service.

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram  (Stem) om de juiste instellingenkaart te vinden.

5. Selecteer de knop **Openen**.

6. Kijk in het **gedeelte Accounts voor Voice Banking**.


Selecteer de knop **Beheren** voor Accounts voor Voice Banking.

7. Selecteer de knop **Aanmelden** in het gedeelte voor uw Voice Banking Service.

8. Voer de **gebruikersnaam** en het **wachtwoord** in.

9. Selecteer de knop **Aanmelden**.

De persoonlijke stem wordt gedownload en automatisch geselecteerd als de standaardstem voor de gebruiker.

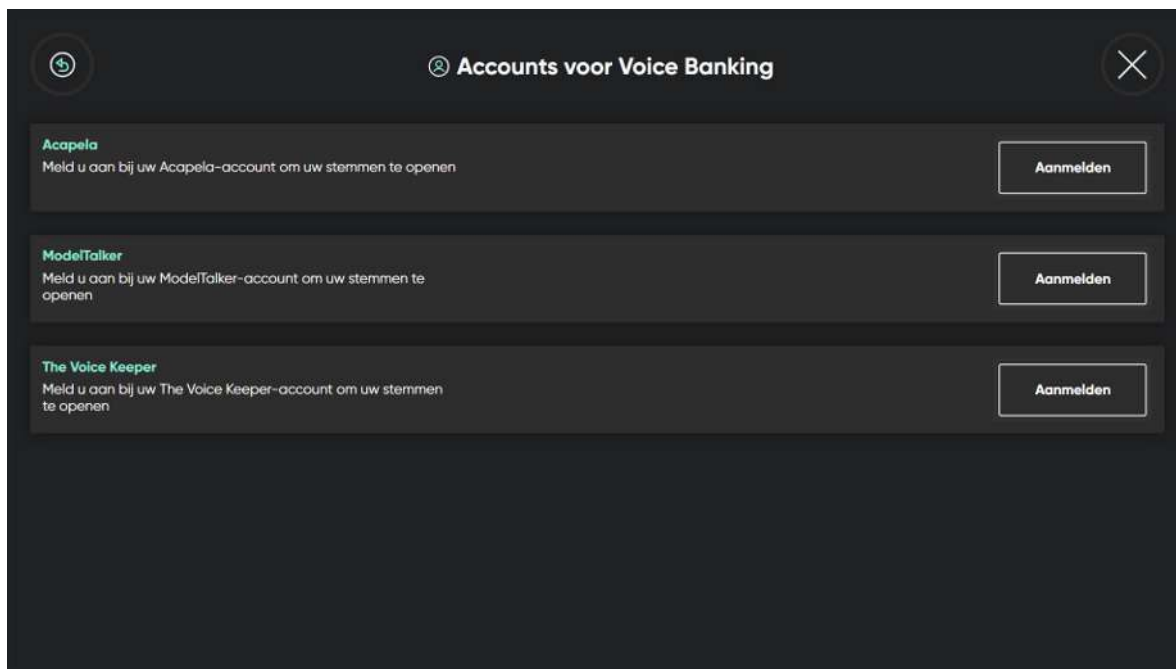

 Dit is het geval wanneer persoonlijke synthetische stemmen in meerdere talen beschikbaar zijn

10. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar Steminstellingen.


11. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar de TD Talk-instellingen.

12. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.6 Apparaat



Alleen beschikbaar op de TD Pilot.

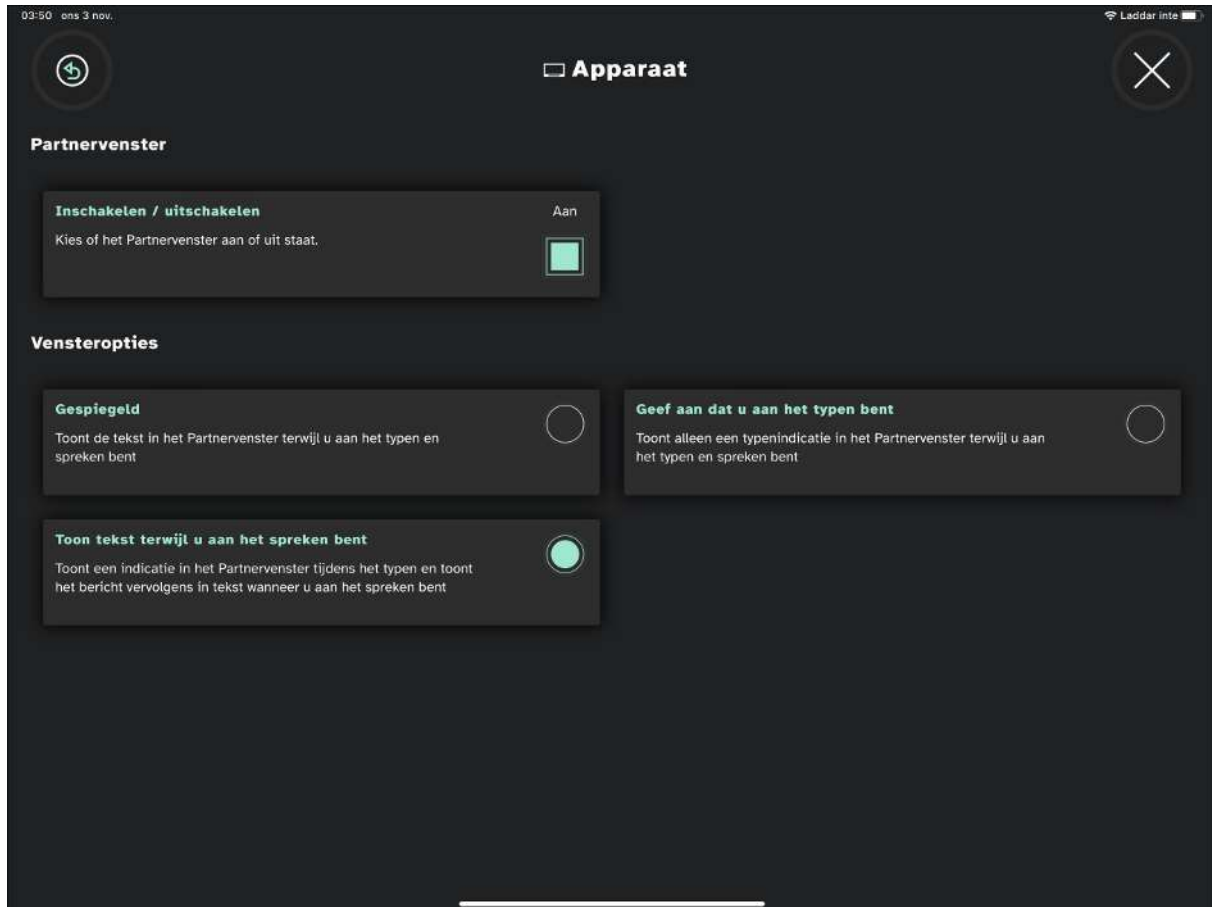

5.6.1 Partnervenster

5.6.1.1 Hoe schakel ik het partnervenster in TD Talk in of uit?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.



4. Zoek naar het pictogram  (Apparaat) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Partnervenster**.
7. Schakel de knop **Inschakelen/uitschakelen** voor '**Kiezen of Partnervenster is in- of uitgeschakeld**' naar:
 - Aan
 - Uit



8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar de TD Talk-instellingen.



9. Selecteer de knop  (Sluiten) om de TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.6.1.2 Hoe stel ik de weergaveopties voor het partnervenster in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.



De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.



2. Selecteer de knop  (Dashboard) om het Dashboard te openen.



3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.



4. Zoek naar het pictogram  (Apparaat) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Weergaveopties**.
7. Selecteer een van de volgende keuzerondjes om de weergaveoptie voor het Partnervenster te kiezen:
 - Gespiegeld: geeft de tekst in het Partnervenster weer terwijl u aan het typen en spreken bent.
 - Tekst weergeven tijdens spreken: geeft een indicatie weer in het Partnervenster tijdens het typen en geeft het bericht weer in tekst tijdens het spreken.
 - Typen aangeven: geeft alleen een type-indicator weer in het Partnervenster tijdens het typen en spreken.



8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar de TD Talk-instellingen.



9. Selecteer de knop  (Sluiten) om de TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.7 Algemeen

5.7.1 Applicatietaal

5.7.1.1 Hoe stel ik mijn applicatietaal in TD Talk in?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.



De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  (Volgend scherm) aan de rechterkant.
5. Selecteer de knop  (Volgend scherm) aan de rechterkant.
6. Zoek naar het pictogram  (Algemeen) om de juiste instellingenkaart te vinden.
7. Selecteer de knop **Openen**.
8. Kijk in het gedeelte **Applicatietaal**.
9. Selecteer de knop **Wijzigen**.
10. Selecteer het keuzerondje naast de taal waarin u de applicatie wilt gebruiken.
11. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
12. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.7.2 Tekstgrootte

5.7.2.1 Hoe wijzig ik de tekstgrootte in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  (Volgend scherm) aan de rechterkant.
5. Selecteer de knop  (Volgend scherm) aan de rechterkant.
6. Zoek naar het pictogram  (Algemeen) om de juiste instellingenkaart te vinden.
7. Selecteer de knop **Openen**.
8. Kijk in het gedeelte **Tekstgrootte**.
9. Selecteer het keuzerondje voor de **Tekstgrootte** voor een van de volgende waarden:
 - **Standaard** (standaard)
 - Groot
10. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
11. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.7.3 Feedback

5.7.3.1 Hoe verzend ik feedback naar Tobii Dynavox in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  (Volgend scherm) aan de rechterkant.
5. Selecteer de knop  (Volgend scherm) aan de rechterkant.
6. Zoek naar het pictogram  (Algemeen) om de juiste instellingenkaart te vinden.
7. Selecteer de knop **Openen**.
8. Kijk in het gedeelte **Feedback**.
9. Selecteer de knop **Feedback**.
10. Gebruik het **toetsenbord** om uw e-mailadres in te voeren.
11. Selecteer de knop  voor het veld Tekst onderwerp.
12. Gebruik het **toetsenbord** om het onderwerp van de e-mail in te vullen.
13. Selecteer de knop  voor het veld Tekst bericht.
14. Gebruik het **toetsenbord** om berichten te versturen.
15. Selecteer de knop  om het veld Tekst bericht te sluiten.
16. Selecteer de knop **Feedback verzenden** om de feedback te verzenden naar Tobii Dynavox.
17. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
18. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.7.4 Servicevoorwaarden en privacyverklaring

5.7.4.1 Hoe open ik de servicevoorwaarden?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om Dashboard te openen.

3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  (Volgend scherm) aan de rechterkant.
5. Selecteer de knop  (Volgend scherm) aan de rechterkant.
6. Zoek naar het pictogram  (Algemeen) om de juiste instellingenkaart te vinden.
7. Selecteer de knop **Openen**.
8. Zoek in het gedeelte **Servicevoorwaarden en privacyverklaring**.
9. Selecteer de knop **Openen**.
10. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
11. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.7.4.2 Hoe open ik de privacyverklaring?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  (Volgend scherm) aan de rechterkant.
5. Selecteer de knop  (Volgend scherm) aan de rechterkant.
6. Zoek naar het pictogram  (Algemeen) om de juiste instellingenkaart te vinden.
7. Selecteer de knop **Openen**.
8. Zoek in het gedeelte **Servicevoorwaarden en privacyverklaring**.
9. Selecteer de knop **Openen**.
10. Selecteer de knop  (Vooruit).
11. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
12. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

5.7.5 Logboeken bijhouden

5.7.5.1 Hoe verzamel ik logboeken voor TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Dashboard) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Dashboard) om Dashboard te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  (Volgend scherm) aan de rechterkant.
5. Selecteer de knop  (Volgend scherm) aan de rechterkant.
6. Zoek naar het pictogram  (Algemeen) om de juiste instellingenkaart te vinden.
7. Selecteer de knop **Openen**.
De instellingenpagina voor Algemeen wordt geopend.
8. Kijk in het gedeelte **Logboeken bijhouden**.
9. Selecteer de knop **Logboek**.
10. Selecteer de knop **Ja**

 Logboeken worden op het bureaublad gemaakt.

11. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
12. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

Copyright © Dynavox Group AB (Publ). Niet alle producten en diensten worden op elke lokale markt aangeboden. Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Alle handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren.

Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox-apparaat

Online help

Raadpleeg de productspecifieke supportpagina voor uw Tobii Dynavox-apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product. Onze ondersteuningspagina's vindt u online op: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Neem contact op met uw productadviseur of wederverkoper

Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox-productadviseur of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactgegevens naar <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.