

TD Talk

Brugervejledning



Brugervejledning TD Talk

Version 1.0

11/2021

Alle rettigheder forbeholdes.

Copyright © Tobii AB (publ)

Intet i denne vejledning må gengives, gemmes i en database eller overføres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, ved fotokopiering, ved optagelse eller på anden måde) uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren.

Den angivne ophavsret inkluderer alle former og dele af det ophavsretligt beskyttede materiale og informationer, som måtte være tilladt under nuværende gældende lov eller vedtaget herefter, inklusiv, men ikke begrænset til, materialer, der dannes af softwareprogrammerne, som vises på skærmen, så som skærmbilleder, menuer, osv.

Oplysningerne i dette dokument tilhører Tobii Dynavox. Gengivelse af hele eller dele af indholdet er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Tobii Dynavox.

Produkter, der henvises til i dette dokument, kan enten være varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Forlaget og forfatteren gør ikke krav på disse varemærker.

Selvom alle foranstaltninger er truffet ved udarbejdelsen af dette dokument, påtager forlaget og forfatteren sig intet ansvar for fejl eller mangler, og ej heller for skader, der måtte opstå som følge af anvendelsen af oplysningerne i dette dokument eller brugen af eventuelt medfølgende programmer og kildekode. Forlaget og forfatteren kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige for tab af fortjeneste eller anden erhvervsmæssig skade, der direkte eller indirekte er opstået som følge af, eller som påstås at være opstået som følge af, indholdet i dette dokument.

Ret til ændring af indholdet uden forudgående varsel forbeholdes.

Besøg Tobii Dynavoxs website

www.TobiiDynavox.com for at se, om der findes en opdateret udgave af dokumentet.

Kontaktoplysninger:

Tobii Dynavox AB
Karlsrovägen 2D
S-182 53 Danderyd
Sverige

+46 (8) 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
Storbritannien

+46 (8) 663 69 90

TingDao Electronics Science & Technology (Suzhou) Co., LTD
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No. 5 Xinghan Street, SIP, Suzhou
Kina 215021


+86 512 69362880



Indholdsfortegnelse

1	Velkommen	4
1.1	Systemkrav	4
1.2	Understøttede sprog.....	4
1.3	Henter TD Progressive Suite.....	4
2	Ressourcer og support	5
2.1	Webressourcer og support.....	5
2.2	myTobiiDynavox.....	5
2.3	Undervisningscenter	5
3	Kom godt i gang.....	6
3.1	Overblik over TD Talk	6
3.2	Øjenstyret systemmenu	7
3.2.1	Hvordan får jeg adgang til den øjenstyrede menu i TD Talk?.....	7
3.3	Dashboard.....	8
3.3.1	Hvordan får jeg adgang jeg til dashboardet i TD Talk?	8
3.3.2	Hvordan afslutter jeg og lukker TD Talk ned?.....	8
3.4	Konfiguration af TD Talk.....	9
4	Brug af TD Talk	10
4.1	Brug af tastatur	10
4.2	Brug af prædiktion.....	10
4.2.1	Ordprædiktion.....	10
4.2.2	Fraseprædiktion.....	11
4.3	Redigering af besked.....	12
4.3.1	Hvordan redigerer jeg en besked?.....	12
4.4	Brug hurtigbeskeder	12
4.4.1	Hvordan bruger jeg hurtigbeskeder i TD Talk?	12
4.4.2	Hvordan redigerer jeg hurtigbeskeder i TD Talk?	13
4.4.3	Hvordan tilføjer jeg en hurtigbesked i TD Talk?	13
4.4.4	Hvordan sletter jeg en hurtigbesked i TD Talk?	14
4.5	Ændring af sprog	14
4.5.1	Hvordan ændrer jeg hurtigt sprog til oplæsning i TD Talk?	14
5	Indstillinger for TD Talk	15
5.1	Aktivering	16
5.1.1	Knapper	16
5.2	Tastatur	18
5.2.1	Knapper	18
5.2.2	Prædiktion.....	19
5.2.3	Generelt.....	20
5.3	Stemme	22
5.3.1	Hvordan vælger jeg min stemme i TD Talk?	22
5.3.2	Hvordan downloader jeg en ny stemme i TD Talk?.....	23
5.4	Enhed	24
5.4.1	Partnervindue	24
5.5	Generelt	26
5.5.1	Hvordan indstiller jeg programsproget i TD Talk?	26

1 Velkommen

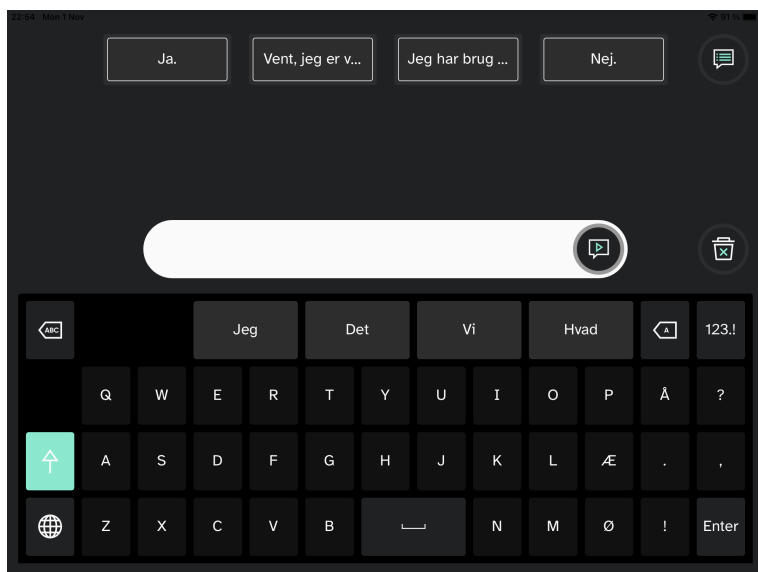

Figur 1.1 TD Talk

TD Talk gør det muligt for mennesker at kommunikere hvem de er, og hvad de vil sige på mest sammenhængende måde. TD Talk er designet, så sætninger kan sammensættes så hurtigt som muligt, så brugeren af enheden, kan blive ved med at være en aktiv deltager i samtalen. TD Talk virker ikke fremmedartet, og brugeren kan hurtigt komme i gang med at anvende den. TD Talk lærer brugerens kommunikationsform og tilpasser sig løbende, så brugeren får mulighed for at sige alt, hvad vedkommende ønsker.

1.1 Systemkrav

Tabel 1.1 iOS

	Styresystem	Enhed	Hukommelse	Berøring	Kamera
Mindst	iOS 15,1	iPad 7. generation	4 GB	Indbygget berøring	Indbygget kamera
Anbefalet	iOS 15,1	iPad, 8. generation	4 GB	Indbygget berøring	Indbygget kamera

1.2 Understøttede sprog

- Dansk (DK)
- Hollandsk (NL)
- Engelsk (US)
- Fransk (FR)
- Tysk (DE)
- Italiensk (IT)
- Norsk (NO)
- Spansk (Latinamerika)
- Svensk (SE)
- Flere sprog kommer snart!

1.3 Henter TD Progressive Suite

TD Talk fås via App Store til iPadOS.

2 Ressourcer og support

Tobii Dynavox tilbyder flere gratis ressourcer, der understøtter og supplerer din oplevelse med TD Talk. Gå ikke glip af disse værktøjer, der hjælper dig med at få mest muligt ud af din Tobii Dynavox-software!

2.1 Webressourcer og support

Hvis du har brug for support, skal du først besøge sektionen Uddannelse og support på Tobii Dynavoxs websted.

2.2 myTobiiDynavox

myTobiiDynavox er din personlige webportal til onlinelagring og deling. Gem dine brugersikkerhedskopier sikkert på myTobiiDynavox, og del med hele dit kommunikationssupportteam.

Gå til myTobiiDynavox.com, og opret en gratis konto.

The logo for myTobiiDynavox, featuring the text "myTobiiDynavox" in white on a green rectangular background.

2.3 Undervisningscenter



Webstedet Undervisningscenter findes i øjeblikket kun på engelsk.

Besøg learn.tobiidynavox.com for dokumentation, undervisning og andre ressourcer, herunder:


- svar på generelle spørgsmål
- undervisningsvideoer
- optagelser af webinarer
- onlinekurser

3 Kom godt i gang

Hvis TD Talk skal bruges sammen med en øjenstyringsenhed, skal du sikre dig, at øjenstyringsenheden er kalibreret til brugeren.

- iOS – Konfigurer øjenstyringsenheden ved hjælp af appen TD CoPilot. Se brugervejledningen til TD Pilot med flere oplysninger.


3.1 Overblik over TD Talk

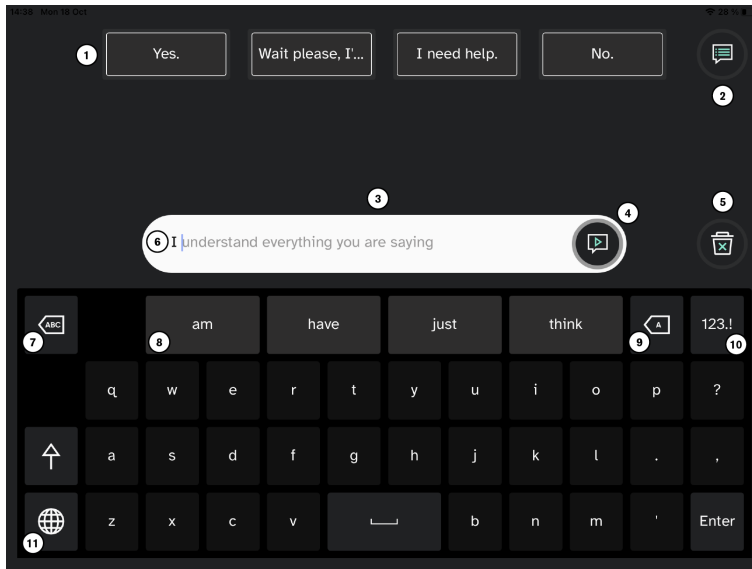

Figur 3.1 TD Talk

Stilling	Beskrivelse	Stilling	Beskrivelse
1	Hurtigbeskeder Færdige beskeder der straks læses op, når de vælges	7	Slet ord Slet ordet til venstre for markøren.
2	Flere hurtigbeskeder Åbn siden med hurtigbeskeder for at oplæse eller redigere dine hurtigbeskeder.	8	Ordprædiktion Gætter automatisk ord på grundlag af det, du har skrevet indtil nu.
3	Beskedvindue Se og rediger teksten, der skal læses op.	9	Backspace Slet tegnet til venstre for markøren.
4	Oplæs Oplæs teksten i beskedvinduet. Du kan også pause og fortsætte oplæsningen.	10	Nummerside Adgang til tal og specialtegn.
5	Ryd Ryd hele teksten i beskedvinduet.	11	Ændre sprog Skift mellem sprog til oplæsning.
6	Fraseprædiktion TD Talk lærer, mens du skriver, og bruger oplysningerne til at gætte sætninger. Prædiktion er baseret på hyppighed og gør kommunikationen hurtigere og mere personlig.		

3.2 Øjenstyret systemmenu

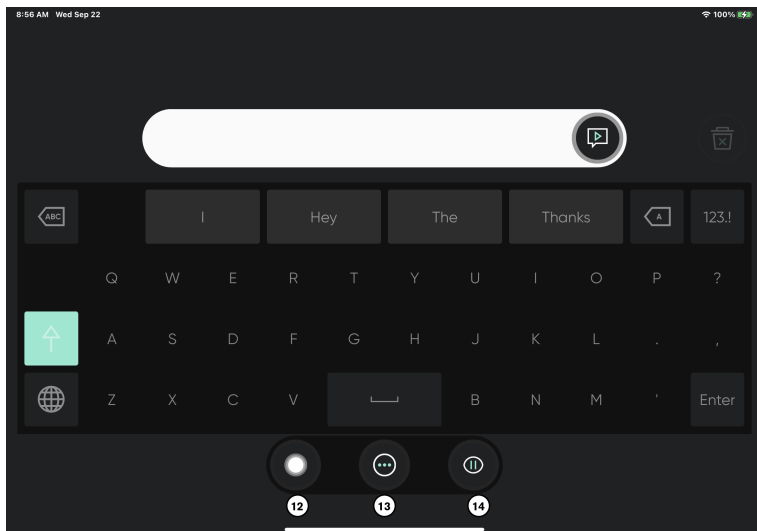

Figur 3.2 Øjenstyret menu til TD Talk


Stilling	Beskrivelse	Stilling	Beskrivelse
12	AssistiveTouch Tænd AssistiveTouch. Brug AssistiveTouch til at åbne skærmen Hjem og alle dine andre apps.	14	Pause/fortsæt øjenstyring Til/fra-knap til at pause og fortsætte øjenstyringen.
13	Flere Adgang til dashboard og indstillinger.		

3.2.1 Hvordan får jeg adgang til den øjenstyrede menu i TD Talk?

Du kan få adgang til den øjenstyrede menu i TD Talk på to måder:

- **Som bruger:** Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.
- **Som hjælper:** Stryk op fra bogstavet T på tastaturet til TD Talk.

3.3 Dashboard

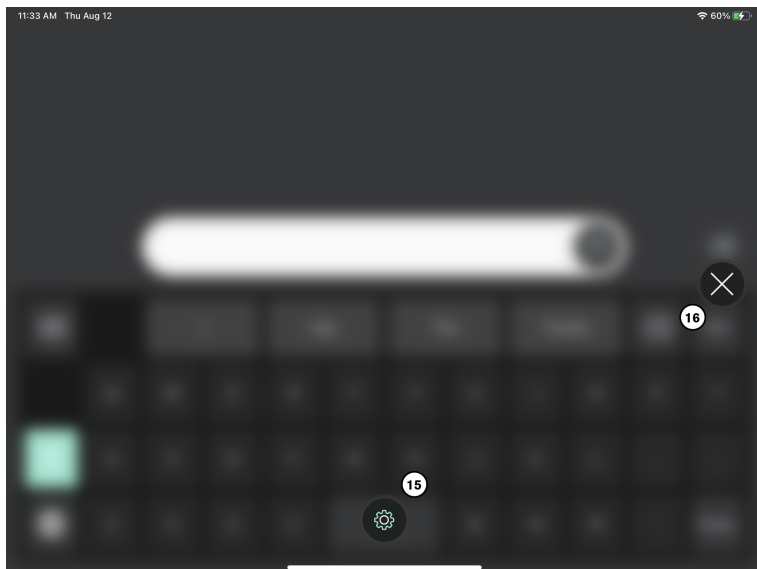

Figur 3.3 Dashboard i TD Talk

Stilling	Beskrivelse	Stilling	Beskrivelse
15	Indstillinger for TD Talk Se 5 <i>Indstillinger for TD Talk</i> med flere oplysninger	16	Afslut dashboard Vælg knappen, der afslutter dashboardet.

3.3.1 Hvordan får jeg adgang jeg til dashboardet i TD Talk?

- Åbn indstillingerne på en af følgende måder:
 - Som bruger:** Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.
 - Som hjælper:** Stryg op fra bogstavet **T** på tastaturet til TD Talk.

Knappen  (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

- Vælg knappen  (Mere) for at åbne Mere.

3.3.2 Hvordan afslutter jeg og lukker TD Talk ned?

- Åbn indstillingerne på en af følgende måder:
 - Som bruger:** Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.
 - Som hjælper:** Stryg op fra bogstavet **T** på tastaturet til TD Talk.

Knappen  (AssistiveTouch) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

- Vælg knappen  (AssistiveTouch) for at åbne menuen til AssistiveTouch.
- Vælg knappen  (Start) i menuen til AssistiveTouch.

3.4 Konfiguration af TD Talk

1. Vælg  TD Talk appen på startskærmen på enheden med iPadOS.
2. Åbn indstillingerne på en af følgende måder:
 - **Som bruger:** Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.
 - **Som hjælper:** Stryg op fra bogstavet T på tastaturet til TD Talk.

Knappen  (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

3. Vælg knappen  (Mere) for at åbne Mere.
4. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.
5. Indstil programsprog for TD Talk:
 - a. Vælg knappen  (Næste skærm) i højre side.
 - b. Se efter ikonet  (Generelt) for at finde det korrekte indstillingskort.
 - c. Vælg knappen **Åbn**.
 - d. Se afsnittet **Programsprog**.
 - e. Vælg alternativknappen ud for det ønskede programsprog.
 - f. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.
6. Vælg stemmer:

- a. Se efter ikonet  (Stemme) for at finde det korrekte indstillingskort.
- b. Vælg knappen **Åbn**.
- c. Se i afsnittet om **dine stemmer**.
- d. Vælg alternativknappen under det ønskede sprog til oplæsning.

 Se 5.2.3.1 *Hvordan tilføjer/downloader jeg et nyt sprog eller tastatursprog i TD Talk?*, side 20 og 5.2.3.2 *Hvordan vælger og aktiverer jeg tastatursprog i TD Talk?*, side 21, hvis du ikke kan finde det ønskede sprog.

- e. Vælg alternativknappen ud for den ønskede stemme i listen med tilgængelige stemmer til sprog til oplæsning. Brug knapperne "Scroll op" og "Scroll ned" til højre for at scrolle gennem listen med stemmer til sprog.

 Vælg  ud for stemmen for at teste stemmen. Hvis den findes.

 Hvis ikonet  (Download) vises i stedet for en alternativknap, skal du vælge det for at downloade stemmen.


- f. Gentag trinnene **d-e**, hvis du ønsker oplæsning på flere sprog.

7. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.



Du kan hurtigt skifte mellem de valgte sprog i TD Talk ved at vælge knappen  i nederste, venstre hjørne af tastaturet.

4 Brug af TD Talk

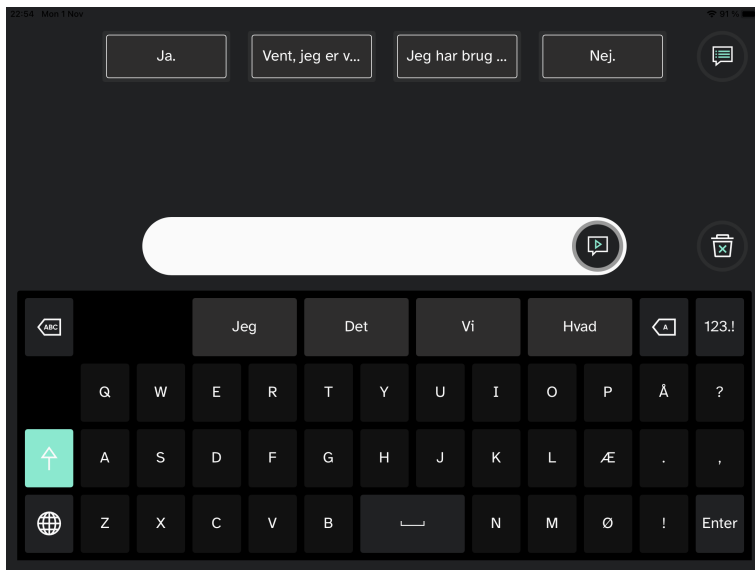

Figur 4.1 TD Talk

4.1 Brug af tastatur

Udvalgte bogstaver på tastaturet, ord og sætninger er indbygget i beskedvinduet. Vælg knappen  (Oplæs), når du er klar til at tale.


4.2 Brug af prædiktion

TD Talk har både ordprædiktion og fraseprædiktion, som kan reducere arbejdet med og/eller gøre det hurtigere at sammensætte beskeder.

4.2.1 Ordprædiktion

Ordprædiktionsmodulet i TD Talk er fra SwiftKey™ og anvendes bredt i tablet-pc'er og smartphones. SwiftKey™ anvender en blanding af teknologier til kunstig intelligens, der gør det muligt at gætte det næste ord, som brugeren har til hensigt at skrive. SwiftKey™ lærer fra tidligere tekster, som brugeren har skrevet, og giver forslag til eller viser prædiktioner ud fra,

hvad der skrives og hvad programmet har lært. Sproget anvendt til ordprædiktion skifter afhængig af indstillingen Sprog til tastatur.

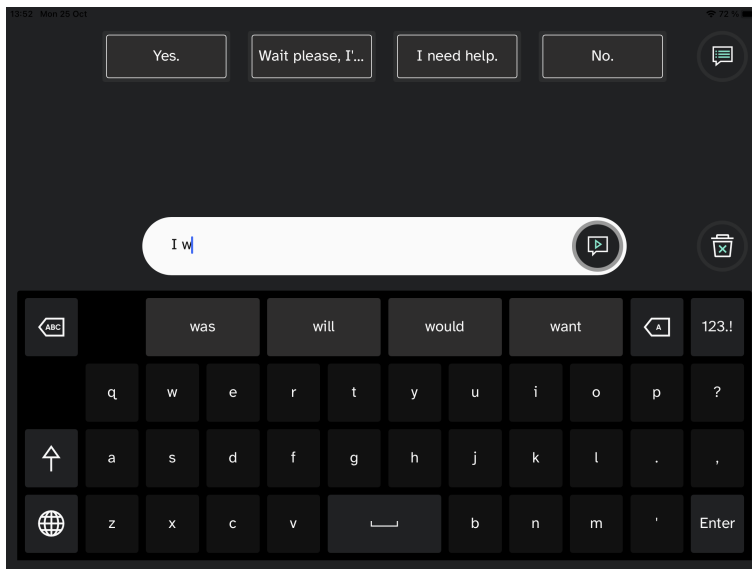


Når der bruges ordprædiktion, vises fire (4) kasser over tastaturet. Kassen længst til venstre indeholder det mest sandsynlige gæt, og de tre (3) øvrige kasser indeholder hver ét gættet ord. Vælg kassen med det rigtige ord, når du skal vælge et gættet ord. Hvis du ikke kan finde det rigtige ord, skal du bare skrive videre. Så vises det rigtige ord forhåbentligt, når du skriver de næste tegn.

Hvis du anvender ordprædiktion og vil skrive et ord med et accenttegn, fx café, sparer du tid og kræfter ved at lade ordprædiktionen placere accenttegnet. Du skal ganske enkelt bare skrive "cafe" for at få forslaget "café".

4.2.2 Fraseprædiktion

TD Talk analyserer og lærer med tiden din talemåde. Ordprædiktion lærer ordene, du siger. Fraseprædiktion lærer, hvordan du sætter ordene sammen til et personligt frasesæt. Når du begynder at skrive, vises gættede fraser fra dit frasesæt med grå tekst i beskedvinduet.

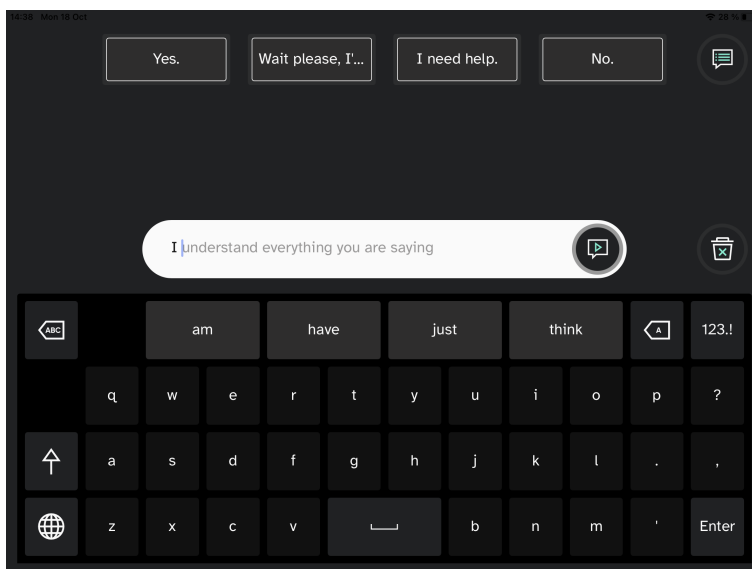


Vælg den gættede frase ved at fastholde dit blik på frasen. Frasen skifter farve fra grå til sort for at vise, at den er valgt. Frasen kan nu læses op eller redigeres.

4.3 Redigering af besked

4.3.1 Hvordan redigerer jeg en besked?

1. Kig på teksten i beskedvinduet. Redigeringsmenuen åbnes.

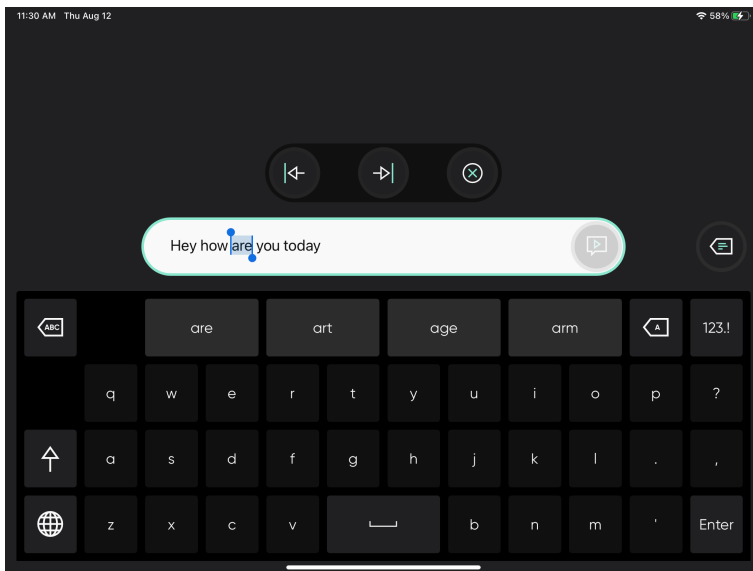

2. Brug pilene  (Flyt til venstre) og  (Flyt til højre) for at navigere til stedet, der skal ændres.
3. Lav ændringen med tastaturet eller ved hjælp af ordprædiktion.
4. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte redigeringstilstanden.

4.4 Brug hurtigbeskeder

4.4.1 Hvordan bruger jeg hurtigbeskeder i TD Talk?

Der er to (2) typer hurtigbeskeder. Den ene type er altid synlig på startskærmen. Den anden type findes under knappen




(Flere hurtigbeskeder).

Hurtigbeskeder på startskærmen

1. Vælg **hurtigbeskeden**, der skal læses op.
Den valgte besked læses straks op men tilføjes ikke til beskedvinduet, så den forstyrrer ikke beskeder, som du er ved at skrive.

Flere hurtigbeskeder

1. Vælg knappen  (Flere hurtigbeskeder).

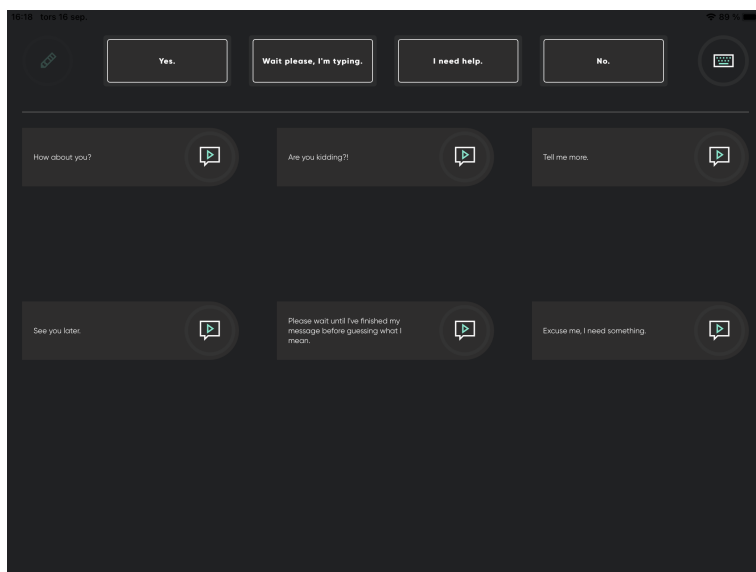

2. Vælg knappen  (Oplæs) ud for beskeden.
3. Vælg knappen  (Tastatur) for at vende tilbage til startskærmen.

4.4.2 Hvordan redigerer jeg hurtigbeskeder i TD Talk?

1. Vælg knappen  (Flere hurtigbeskeder).
2. Vælg knappen  (Rediger).
3. Vælg knappen  (Rediger) ud for beskeden, der skal redigeres.
4. Lav ændringerne i beskeden med tastaturet.
5. Vælg knappen  (Gem) for at gemme ændringerne i hurtigbeskeden.
6. Vælg knappen  (Luk) for at forlade redigeringskærmen.
7. Vælg knappen  (Tastatur) for at vende tilbage til startskærmen.

4.4.3 Hvordan tilføjer jeg en hurtigbesked i TD Talk?

1. Vælg knappen  (Flere hurtigbeskeder).
2. Vælg knappen  (Rediger).
3. Vælg knappen  (Tilføj) ud for placeringen Tilføj ny.
4. Skriv den nye besked med tastaturet.

5. Vælg knappen  (Gem) for at gemme ændringerne i hurtigbeskeden.
6. Vælg knappen  (Luk) for at forlade redigeringsskærmen.
7. Vælg knappen  (Tastatur) for at vende tilbage til startskærmen.

4.4.4 Hvordan sletter jeg en hurtigbesked i TD Talk?


1. Vælg knappen  (Flere hurtigbeskeder).
2. Vælg knappen  (Rediger).
3. Vælg knappen  (Rediger) ud for beskeden, der skal slettes.
4. Vælg knappen  Slet besked.
5. Vælg knappen  (Gem) for at gemme ændringerne i hurtigbeskeden.
6. Vælg knappen  (Luk) for at forlade redigeringsskærmen.
7. Vælg knappen  (Tastatur) for at vende tilbage til startskærmen.

4.5 Ændring af sprog

4.5.1 Hvordan ændrer jeg hurtigt sprog til oplæsning i TD Talk?

1. Vælg knappen  (Sprog) på tastaturet.
2. Vælg sprog til oplæsning
Se , hvis du ikke kan finde det ønskede sprog 5.2.3.1 *Hvordan tilføjer/downloader jeg et nyt sprog eller tastatursprog i TD Talk?, side 20*
3. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage

5 Indstillinger for TD Talk

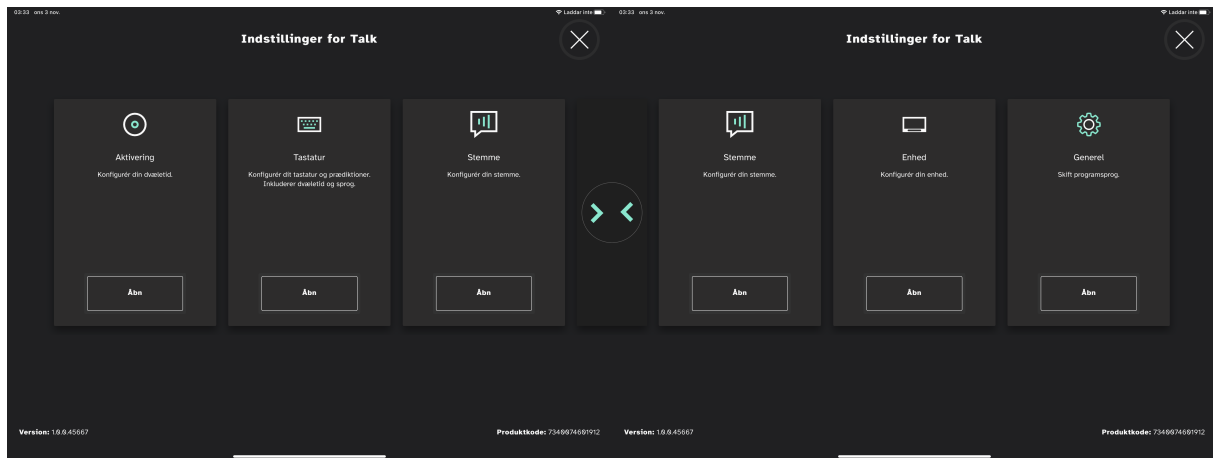


Ikoner	Handling	Beskrivelse
	Aktivering	Vises kun, hvis der er installeret en øjenstyringsenhed, der er aktiveret. Åbner indstillingerne for Aktivering . Se 5.1 <i>Aktivering</i> , side 16 med flere oplysninger.
	Tastatur	Åbner indstillinger for Tastatur . Se 5.2 <i>Tastatur</i> , side 18 med flere oplysninger.
	Stemme	Åbner indstillingerne for Stemme . Se 5.3 <i>Stemme</i> , side 22 med flere oplysninger.
	Enhed	Findes kun på TD Pilot. Åbner indstillingerne for Enhed . Se 5.4 <i>Enhed</i> , side 24 med flere oplysninger.
	Generelt	Åbner indstillingerne Generelt . Se 5.5 <i>Generelt</i> , side 26 med flere oplysninger.

5.1 Aktivering



Vises kun, hvis der er installeret en øjenstyringsenhed, der er aktiveret.

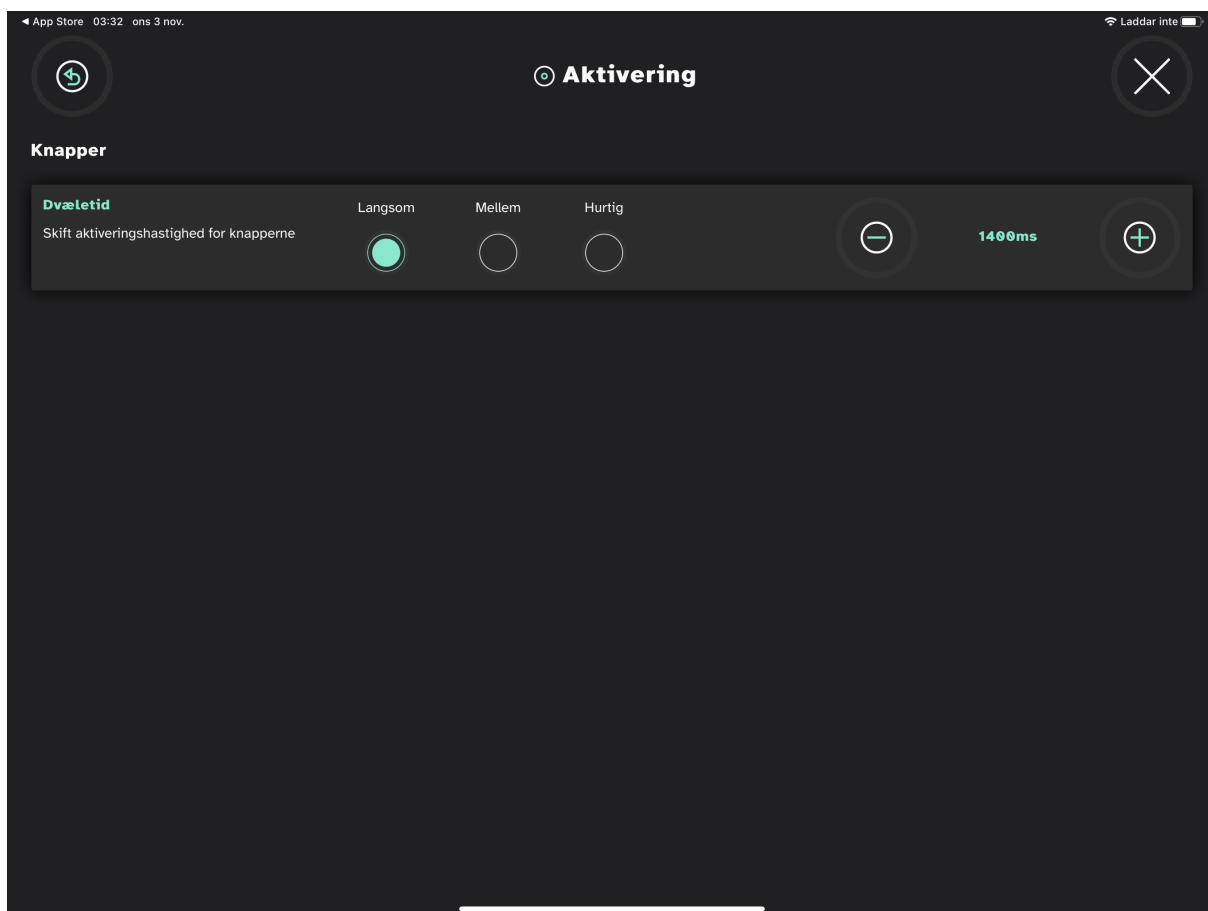

5.1.1 Knapper

5.1.1.1 Hvordan ændrer jeg dvæletiden for aktivering af knapperne i TD Talk?



Knapper henviser ikke til knapperne på tasturet men til knapperne, der er placeret alle andre steder i TD Talk.

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Aktivering) for at finde det korrekte indstillingskort.

5. Vælg knappen **Åbn**.

6. Se afsnittet om **knapper**.
7. Vælg alternativknappen for **dvæletid** med en af følgende værdier:
 - Langsom
 - **Mellem** (standard)
 - Hurtig

8. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.
9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.1.1.2 Hvordan finjusterer jeg dvæletiden for aktivering af knapperne i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.


2. Vælg knappen  (Mere) for at åbne Mere.
3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.
4. Se efter ikonet  (Aktivering) for at finde det korrekte indstillingskort.
5. Vælg knappen **Abn.**
6. Se afsnittet om **knapper**.
7. Vælg en af følgende knapper for at finjustere **dvæletiden**:

-  – reducerer dvæletiden
-  – forøger dvæletiden

Tiden kan indstilles mellem 200 millisekunder og uendeligt

8. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.
9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.2 Tastatur

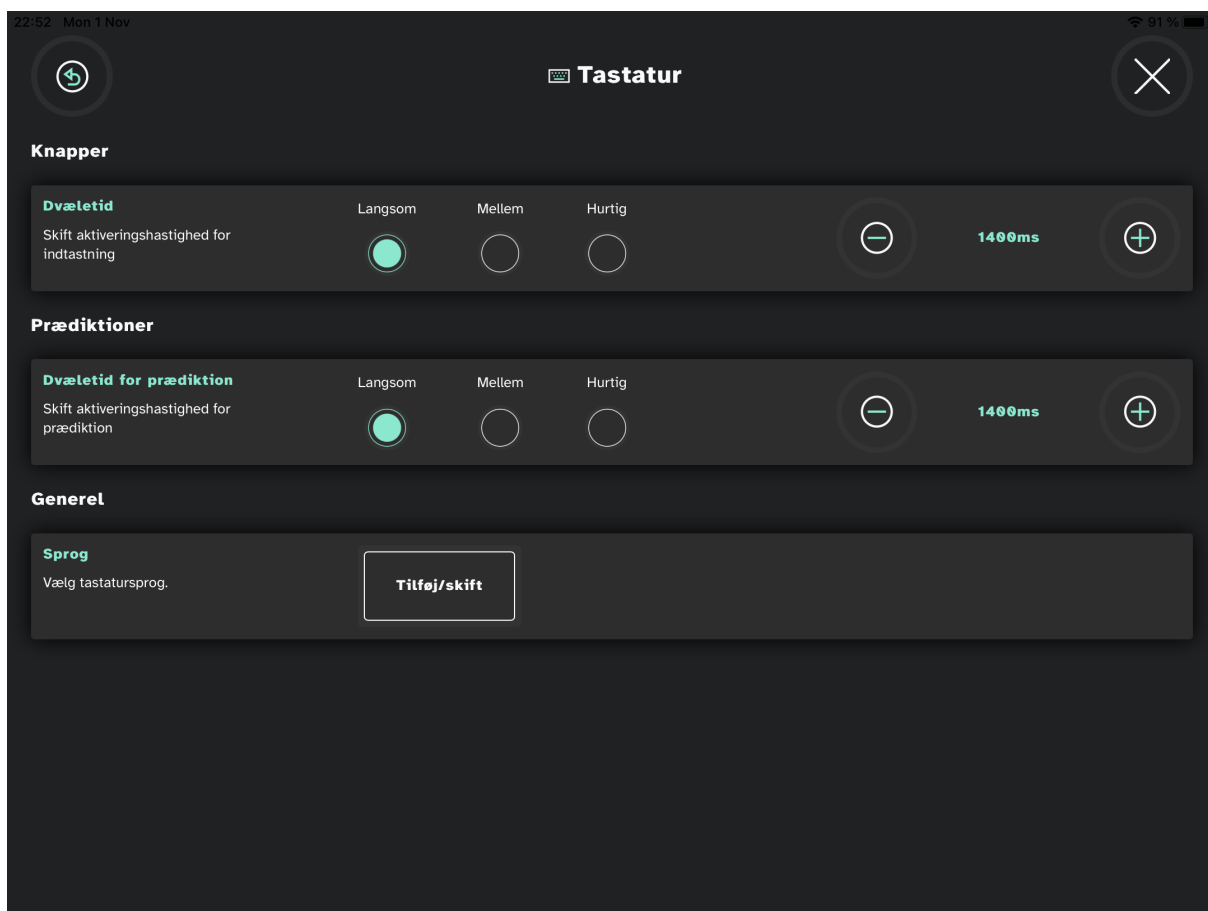

5.2.1 Knapper

5.2.1.1 Hvordan ændrer jeg dvæletiden for tastaturknapperne i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.

5. Vælg knappen **Abn.**

6. Se afsnittet om **knapper**.

7. Vælg alternativknappen for **dvæletid** med en af følgende værdier:

- Langsom
- **Mellem** (standard)
- Hurtig

8. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.
9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.2.1.2 Hvordan finjusterer jeg dvæletiden for aktivering af knapperne i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.

5. Vælg knappen **Åbn**.

6. Se afsnittet om **knapper**.

7. Vælg en af følgende alternativknapper for at finjustere **dvæletiden**:

-  – reducerer dvæletiden
-  – forøger dvæletiden

Tiden kan indstilles mellem 200 millisekunder og uendeligt

8. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.
9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.2.2 Prædiktion

5.2.2.1 Hvordan ændrer jeg dvæletiden for prædiktionsknapperne i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.

5. Vælg knappen **Åbn**.

6. Se afsnittet om **prædiktioner**.

7. Vælg alternativknappen for **dvæletid** med en af følgende værdier:

- Langsom
- **Mellem** (standard)
- Hurtig

8. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.2.2.2 Hvordan finjusterer jeg dvæletiden for prædiktionsknapperne i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.

5. Vælg knappen **Åbn**.

6. Se afsnittet om **prædiktioner**.

7. Vælg en af følgende alternativknapper for at finjustere **dvæletiden**:

-  – reducerer dvæletiden
-  – forøger dvæletiden

Tiden kan indstilles mellem 200 millisekunder og uendeligt

8. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.2.3 Generelt

5.2.3.1 Hvordan tilføjer/downloader jeg et nyt sprog eller tastatursprog i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.

5. Vælg knappen **Åbn**.

6. Se afsnittet **Generelt**.

7. Vælg knappen "Vælg tastatursprog" **Tilføj/skift**.

8. Vælg fanen **Download**.

9. Vælg knappen  (Download) ud for sproget for at starte download af det nye tastatur.

10. Vælg knappen **Download** for at starte download eller knappen **Annuller** for at annullere download.

11. Vælg fanen **Installeret**.

12. Aktiver sproget ved at vælge alternativknappen ud for sproget.

13. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

14. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.2.3.2 Hvordan vælger og aktiverer jeg tastatursprog i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Tastatur) for at finde det korrekte indstillingskort.

5. Vælg knappen **Åbn**.

6. Vælg knappen "Vælg tastatursprog" **Tilføj/skift**.

7. Vælg fanen **Installeret**.

8. Vælg alternativknappen ud for sproget for at aktivere tastatursproget for det sprog.



Sørg for at vælge alternativknappen for alle sprog, som stemmen skal bruge.


9. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

10. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.3 Stemme



Her indstilles stemmen for sproget til oplæsning.

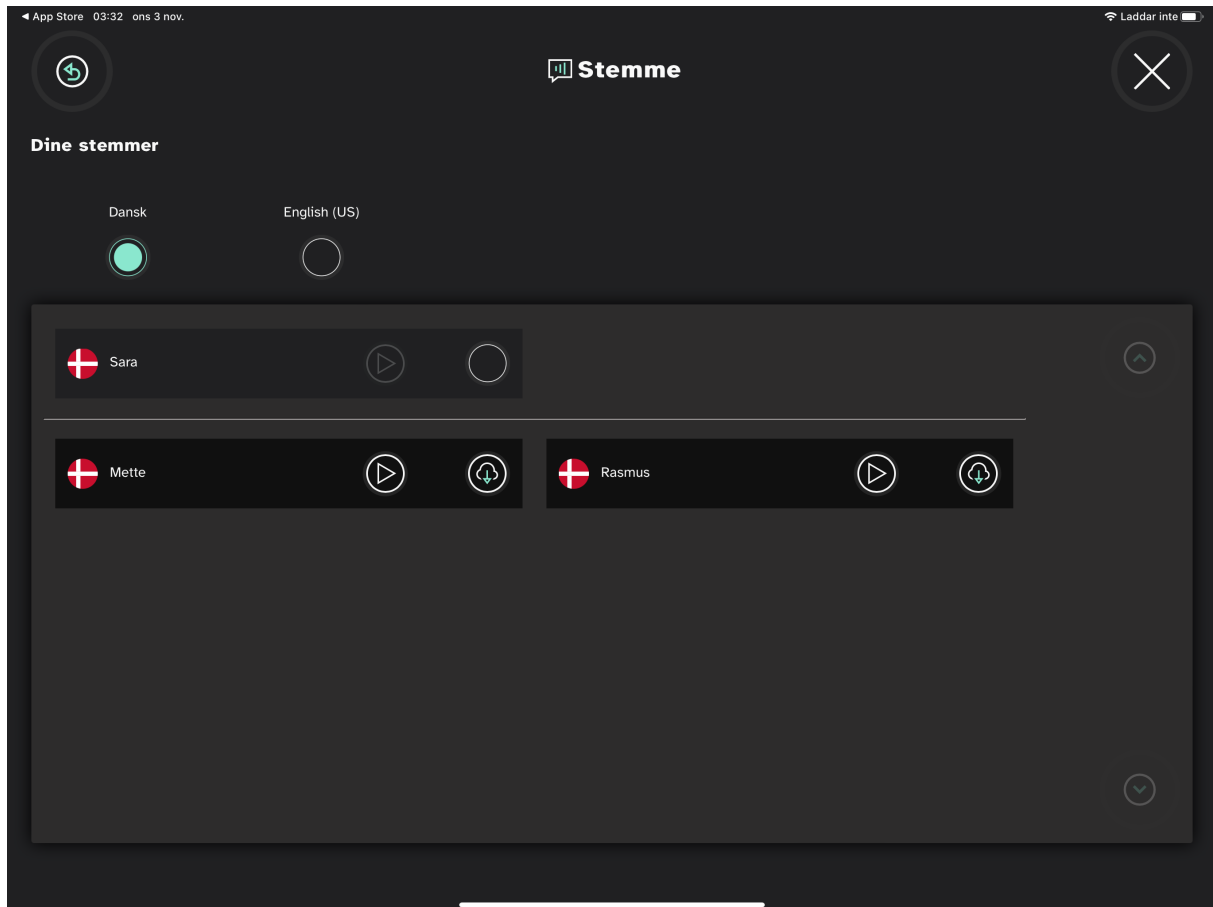

Alle indstillede sprog vises i den øverste del af skærmen. Efter valg af sprog vises de tilgængelige stemmer for sproget i listen under sprogene. Vælg  ud for stemmen for at teste stemmen. Hvis den findes.

5.3.1 Hvordan vælger jeg min stemme i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Stemme) for at finde det korrekte indstillingskort.

5. Vælg knappen **Åbn**.

6. Se i afsnittet om **dine stemmer**.

7. Vælg alternativknappen under det ønskede sprog til oplæsning.



Se 5.2.3.1 *Hvordan tilføjer/downloader jeg et nyt sprog eller tastatursprog i TD Talk?*, side 20 og 5.2.3.2 *Hvordan vælger og aktiverer jeg tastatursprog i TD Talk?*, side 21, hvis du ikke kan finde det ønskede sprog.

- Vælg den ønskede stemme i listen med tilgængelige stemmer til sprog til oplæsning.
Brug knapperne "Scroll op" og "Scroll ned" til højre for at scrolle gennem listen med stemmer til sprog.



Vælg  ud for stemmen for at teste stemmen.

- Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

- Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.3.2 Hvordan downloader jeg en ny stemme i TD Talk?

- Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

- Vælg knappen  (Mere) for at åbne Mere.

- Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

- Se efter ikonet  (Stemme) for at finde det korrekte indstillingskort.

- Vælg knappen **Åbn**.

- Se i afsnittet om **dine stemmer**.

- Vælg alternativknappen under det ønskede sprog til oplæsning.



Se 5.2.3.1 *Hvordan tilføjer/downloader jeg et nyt sprog eller tastatursprog i TD Talk?*, side 20 og 5.2.3.2 *Hvordan vælger og aktiverer jeg tastatursprog i TD Talk?*, side 21, hvis du ikke kan finde det ønskede sprog.

- Vælg knappen  (Download) ud for sproget for at starte download af det nye tastatur.
Brug knapperne "Scroll op" og "Scroll ned" til højre for at scrolle gennem listen med stemmer til sprog.



Vælg  ud for stemmen for at teste stemmen.

- Vælg knappen **Download** for at starte download eller knappen **Annuller** for at annullere download.

- Vælg den ønskede stemme i listen med tilgængelige stemmer til sprog til oplæsning.


- Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

- Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.4 Enhed



Findes kun på TD Pilot.

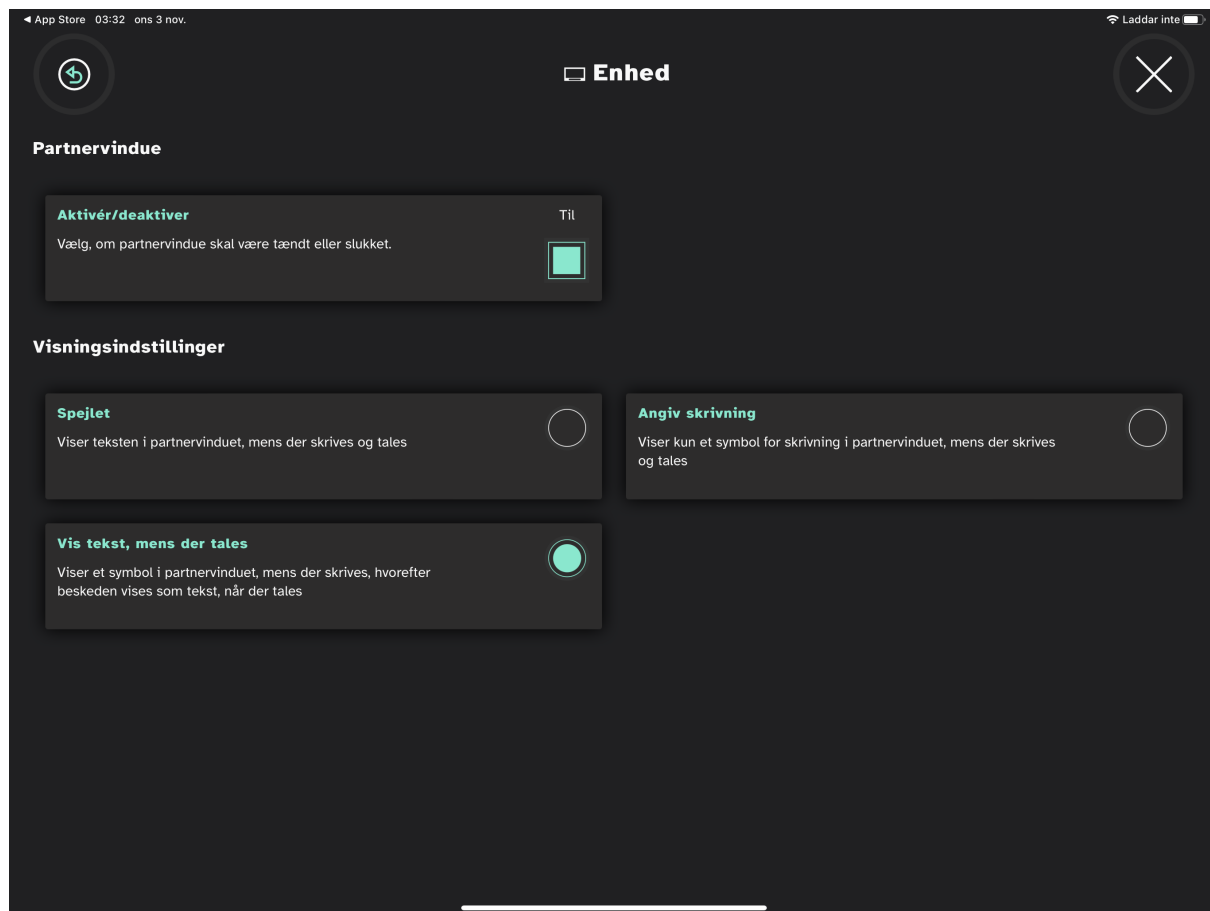

5.4.1 Partnervindue

5.4.1.1 Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg partnervinduet i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Enhed) for at finde det korrekte indstillingskort.

5. Vælg knappen **Åbn**.

6. Se afsnittet om **partnervindue**.

7. Sæt knappen til **aktivering/deaktivering** for "**Vælg partnervindue til/fra**" til:

- Til
- Fra

8. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.
9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.4.1.2 Hvordan indstiller jeg visningsindstillingerne for partnervinduet i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Se efter ikonet  (Enhed) for at finde det korrekte indstillingskort.

5. Vælg knappen **Åbn**.


6. Se i afsnittet om **visningsindstillinger**.

7. Vælg en af følgende alternativknapper for at vælge visningsindstilling for partnervinduet:

- Spejlet – Viser teksten i partnervinduet, mens der skrives og oplæses.
- Vis tekst, mens der tales – Viser et symbol i partnervinduet, mens der skrives, hvorefter beskeden vises som tekst, når den læses op.
- Angiv skrivning – Viser kun et symbol for skrivning i partnervinduet, mens der skrives og læses op.

8. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.
9. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

5.5 Generelt

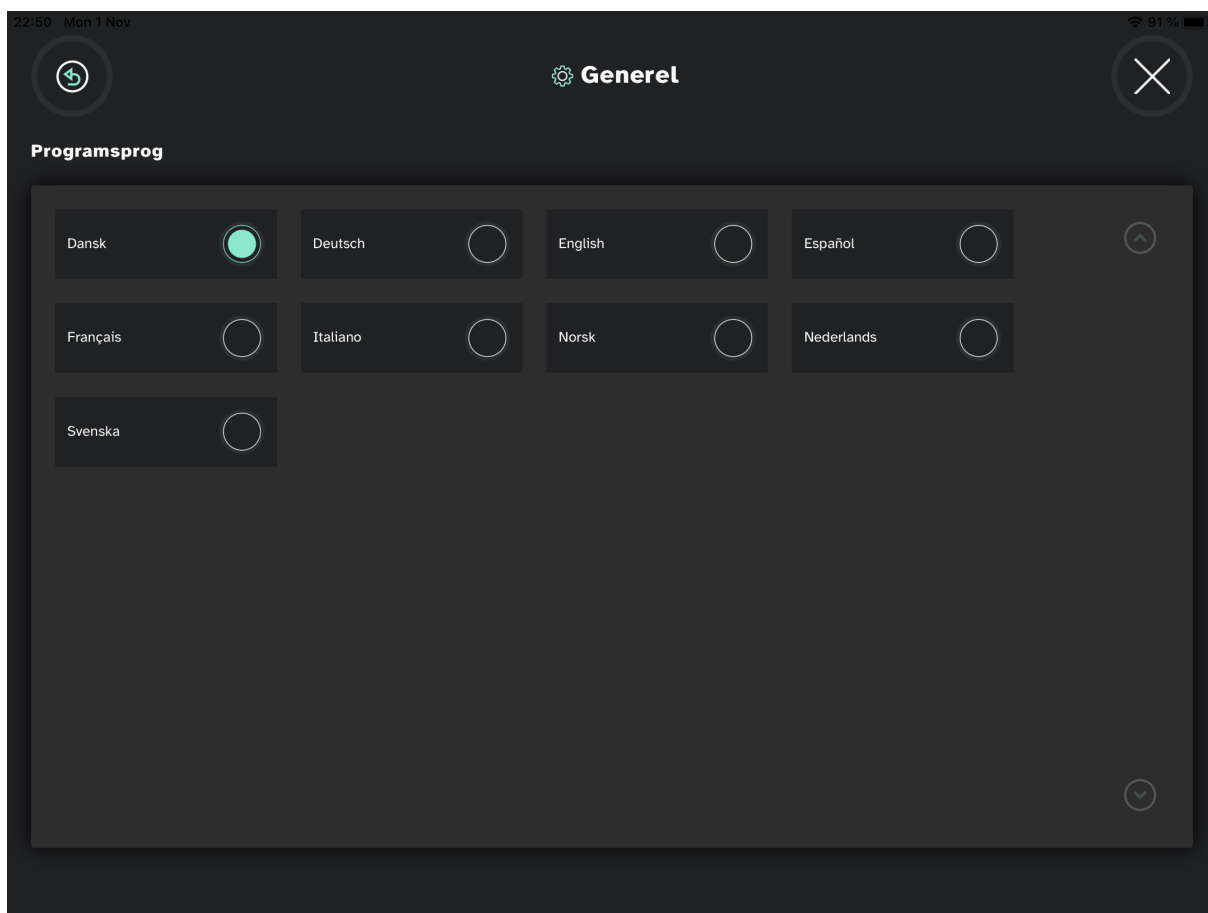

5.5.1 Hvordan indstiller jeg programsproget i TD Talk?

1. Se under skærmen, i midten af øjenstyringsenheden eller i området for øjenstyringsenheden.

Knappen  (Mere) vises i den nederste, midterste del af skærmen.

2. Vælg knappen  (Mere) for at åbne Mere.

3. Vælg handlingen  (Indstillinger) for at åbne indstillingerne for TD Talk.

4. Vælg knappen  (Næste skærm) i højre side.

5. Se efter ikonet  (Generelt) for at finde det korrekte indstillingskort.

6. Vælg knappen **Åbn**.

7. Se afsnittet **Programsprog**.

8. Vælg alternativknappen ud for det ønskede programsprog.

9. Vælg knappen  (Tilbage) for at gå tilbage til indstillingerne for TD Talk.

10. Vælg knappen  (Luk) for at afslutte indstillingerne for TD Talk.

Copyright © Tobii Dynavox AB. Ikke alle produkter og tjenester kan fås i alle lande. Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

Support til din Tobii Dynavox enhed

Få hjælp på internettet

Se den produktspecifikke supportside for din Tobii Dynavox enhed. Den indeholder opdateret information om problemstillinger samt tips og tricks angående produktet. Find vores supportsider online på: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakt din ASK-konsulent eller forhandler

Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, skal du bede din ASK-konsulent hos Tobii Dynavox eller en godkendt forhandler om hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan bedst hjælpe dig med tips og produkttræning. Kontaktoplysninger findes på www.TobiiDynavox.com/contact