

# TD Talk

## Gebruikershandleiding



## Gebruikershandleiding TD Talk

Versie 1.0

12/2021

Alle rechten voorbehouden.

Copyright © Tobii AB (publ)

Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke wijze dan ook (elektronisch, met gebruik van fotokopieën en opnamen of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De geclaimde copyright-bescherming omvat alle vormen van auteursrechtelijk beschermd materiaal en auteursrechtelijk beschermde informatie volgens de wet of hierin toegestaan, inclusief en niet beperkt tot materialen gegenereerd door de softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals schermweergaven en menu's.

De informatie in dit document is eigendom van Tobii Dynavox. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tobii Dynavox is verboden.

Producten waarnaar in dit document wordt verwezen kunnen handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren. De uitgever en de auteur maken geen aanspraak op deze handelsmerken.

Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen in de voorbereiding van dit document, zijn de uitgever en de auteur niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen, noch voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in dit document of uit het gebruik van programma's en eventuele bijbehorende broncode. De uitgever en de auteur kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van winst of enige andere commerciële schade die direct of indirect is veroorzaakt of wordt vermeend te zijn veroorzaakt door dit document.

De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Raadpleeg de website

[www.TobiiDynavox.com](http://www.TobiiDynavox.com) voor bijgewerkte versies van dit document.

### Contactgegevens:

Tobii Dynavox AB  
Karlsrovägen 2D  
182 53 Danderyd  
Zweden

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC  
2100 Wharton Street, Suite 400  
Pittsburgh, PA 15203  
VS

+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.  
Sheffield Technology Parks  
Cooper Buildings  
Arundel Street  
Sheffield S1 2NS  
Verenigd Koninkrijk

+46 8 663 69 90

TingDao Electronics Science & Technology (Suzhou) Co., LTD  
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP, Suzhou  
Volksrepubliek China 215021


+86 512 69362880



# Inhoudsopgave

|       |                                                         |    |
|-------|---------------------------------------------------------|----|
| 1     | Welkom .....                                            | 4  |
| 1.1   | Systeemvereisten .....                                  | 4  |
| 1.2   | Ondersteunde talen .....                                | 4  |
| 1.3   | TD Progressive Suite verkrijgen .....                   | 4  |
| 2     | Middelen en Ondersteuning .....                         | 5  |
| 2.1   | Bronnen en Ondersteuning op het internet .....          | 5  |
| 2.2   | myTobiiDynavox .....                                    | 5  |
| 2.3   | Leercentrum .....                                       | 5  |
| 3     | Beginnen .....                                          | 6  |
| 3.1   | Overzicht van TD Talk .....                             | 7  |
| 3.2   | Offscreenmenu .....                                     | 8  |
| 3.2.1 | Hoe open ik het offscreenmenu in TD Talk? .....         | 8  |
| 3.3   | Dashboard .....                                         | 9  |
| 3.3.1 | Hoe open ik het dashboard in TD Talk? .....             | 9  |
| 3.3.2 | Hoe sluit ik TD Talk af? .....                          | 9  |
| 3.4   | TD Talk instellen .....                                 | 10 |
| 4     | TD Talk gebruiken .....                                 | 11 |
| 4.1   | Het toetsenbord gebruiken .....                         | 11 |
| 4.2   | Voorspellingen gebruiken .....                          | 11 |
| 4.2.1 | Woordvoorspellingen .....                               | 11 |
| 4.2.2 | Zinvoorspelling .....                                   | 12 |
| 4.3   | Een bericht bewerken .....                              | 13 |
| 4.3.1 | Hoe bewerk ik een bericht? .....                        | 13 |
| 4.4   | Korte berichten gebruiken .....                         | 13 |
| 4.4.1 | Hoe gebruik ik korte berichten TD Talk? .....           | 13 |
| 4.4.2 | Hoe kan ik de korte berichten TD Talk bewerken? .....   | 14 |
| 4.4.3 | Hoe voeg ik een kort bericht TD Talk toe? .....         | 14 |
| 4.4.4 | Hoe verwijder ik een kort bericht in TD Talk? .....     | 15 |
| 4.5   | De taal wijzigen .....                                  | 15 |
| 4.5.1 | Hoe wijzig ik snel de te spreken taal in TD Talk? ..... | 15 |
| 5     | Instellingen TD Talk .....                              | 16 |
| 5.1   | Activering .....                                        | 17 |
| 5.1.1 | Knoppen .....                                           | 17 |
| 5.2   | Toetsenbord .....                                       | 19 |
| 5.2.1 | Knoppen .....                                           | 19 |
| 5.2.2 | Voorspelling .....                                      | 20 |
| 5.2.3 | Algemeen .....                                          | 21 |
| 5.3   | Stem .....                                              | 23 |
| 5.3.1 | Hoe selecteer ik mijn stem in TD Talk? .....            | 23 |
| 5.3.2 | Hoe download ik een nieuwe stem in TD Talk? .....       | 24 |
| 5.4   | Apparaat .....                                          | 25 |
| 5.4.1 | Partnervenster .....                                    | 25 |
| 5.5   | Algemeen .....                                          | 27 |
| 5.5.1 | Hoe stel ik mijn applicatietaal in TD Talk in? .....    | 27 |

# 1 Welkom

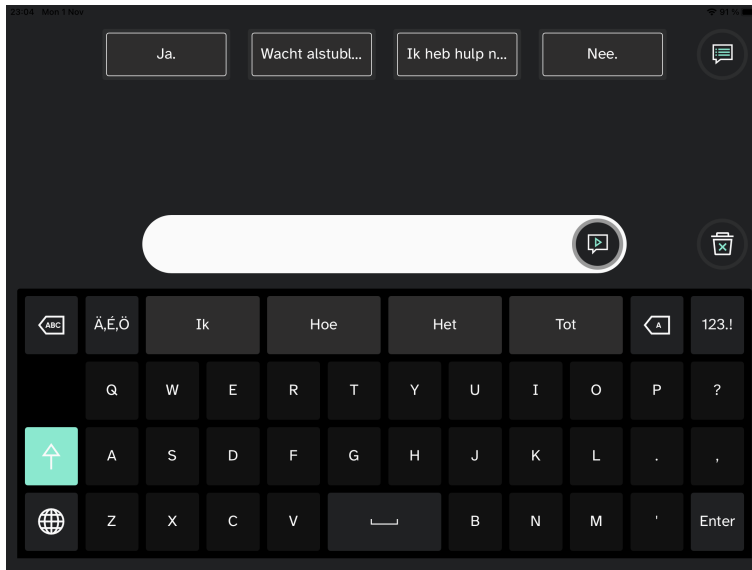

Afbeelding 1.1 TD Talk

Met TD Talk kunnen mensen op een zo vloeiend mogelijke manier laten weten wie ze zijn en wat ze willen zeggen. Deze is zodanig ontwikkeld om ervoor te zorgen dat personen die TD Talk gebruiken, actief kunnen blijven deelnemen aan het gesprek. TD Talk ziet er vertrouwd uit en voelt vertrouwd aan, zodat personen die er gebruik van maken zo snel mogelijk aan de slag kunnen. TD Talk leert hoe een bepaald persoon communiceert en past zich voortdurend aan om ervoor te zorgen dat ze precies kunnen zeggen wat ze willen zeggen.

## 1.1 Systeemvereisten

Tabel 1.1 iOS

|                   | Besturingssys-<br>teem | Apparaat          | Geheugen | Aanraken                   | Camera                  |
|-------------------|------------------------|-------------------|----------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Minimaal</b>   | iOS 15,1               | iPad 7e generatie | 4 GB     | Geïntegreerde<br>aanraking | Geïntegreerde<br>camera |
| <b>Aanbevolen</b> | iOS 15,1               | iPad 8e generatie | 4 GB     | Geïntegreerde<br>aanraking | Geïntegreerde<br>camera |

## 1.2 Ondersteunde talen

- Deens (DK)
- Nederlands (NL)
- Engels (US)
- Frans (FR)
- Duits (DE)
- Italiaans (IT)
- Noors (NO)
- Spaans (Latijns-Amerika)
- Zweeds (SE)
- Binnenkort komen er meer talen beschikbaar!

## 1.3 TD Progressive Suite verkrijgen

TD Talk is verkrijgbaar via de Apple App Store voor iPadOS.

## 2 Middelen en Ondersteuning

Tobii Dynavox biedt verschillende gratis tools aan om uw ervaring met TD Talk te ondersteunen en aan te vullen. Vergeet deze tools niet. Ze zullen u helpen om uw Tobii Dynavox optimaal te gebruiken!

### 2.1 Bronnen en Ondersteuning op het internet

Als u ondersteuning nodig hebt, gaat u eerst naar het gedeelte Training en ondersteuning op de Tobii Dynavox-website.

### 2.2 myTobiiDynavox

myTobiiDynavox is uw persoonlijke online opslagwebsite en portaal voor delen. Upload uw gebruikersback-upbestanden naar myTobiiDynavox om ze veilig te bewaren en deel deze met uw volledige team dat u ondersteunt bij de communicatie.

Ga naar [www.myDynaVox.com](http://www.myDynaVox.com) om u te registreren voor een gratis account.

The logo for mytobii dynavox, featuring the text "mytobii dynavox" in white on a green rectangular background.

### 2.3 Leercentrum



Het Leercentrum is momenteel alleen in het Engels beschikbaar.

Ga naar [tobiidynavox.com/support-training/](http://tobiidynavox.com/support-training/) voor documentatie, training en andere tools, waaronder:


- antwoorden op veelgestelde vragen
- trainingsvideo's
- opgenomen webinars
- Online cursussen

# 3    **Beginnen**

Als TD Talk samen met een oogbesturingsmodule wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de kalibratie voor de oogbesturingsmodule actief is.

- iOS: gebruik de TD CoPilot-app voor het instellen van de oogbesturingsmodule.  
Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van TD Pilot.


## 3.1 Overzicht van TD Talk

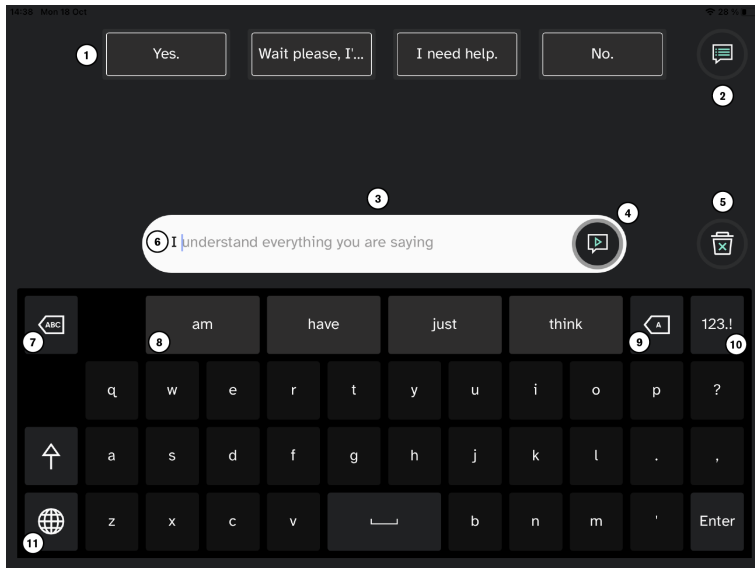

Afbeelding 3.1 TD Talk

| Positie | Beschrijving                                                                                                                                                                                           | Positie | Beschrijving                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <b>Korte berichten</b><br>Vooraf opgestelde berichten die onmiddellijk uitgesproken worden wanneer ze worden geselecteerd                                                                              | 7       | <b>Woord verwijderen</b><br>Verwijdert het woord links van de cursor.                                 |
| 2       | <b>Meer korte berichten</b><br>Opent de pagina Korte berichten om ze uit te laten spreken of te bewerken.                                                                                              | 8       | <b>Woordvoorspelling</b><br>Voorspelt automatisch woorden, gebaseerd op wat u tot nu toe getypt hebt. |
| 3       | <b>Berichtenvenster</b><br>Bekijk en bewerk hier de tekst die u zou willen uitspreken.                                                                                                                 | 9       | <b>Backspace</b><br>Verwijdert het teken links van de cursor.                                         |
| 4       | <b>Spreken</b><br>Spreekt de tekst uit in het Berichtenvenster. Je kan ook het uitspreken pauzeren en hervatten.                                                                                       | 10      | <b>Pagina Cijfers</b><br>Toegang tot cijfers en speciale tekens.                                      |
| 5       | <b>Wissen</b><br>Wist alle tekst in het Berichtenvenster.                                                                                                                                              | 11      | <b>Taal wijzigen</b><br>Schakelt tussen de talen die u spreekt.                                       |
| 6       | <b>Zinvoorspelling</b><br>TD Talk leert van wat u typt en gebruikt die informatie om zinnen te voorspellen. De voorspelling is gebaseerd op frequentie en maakt communicatie sneller en persoonlijker. |         |                                                                                                       |

## 3.2 Offscreenmenu

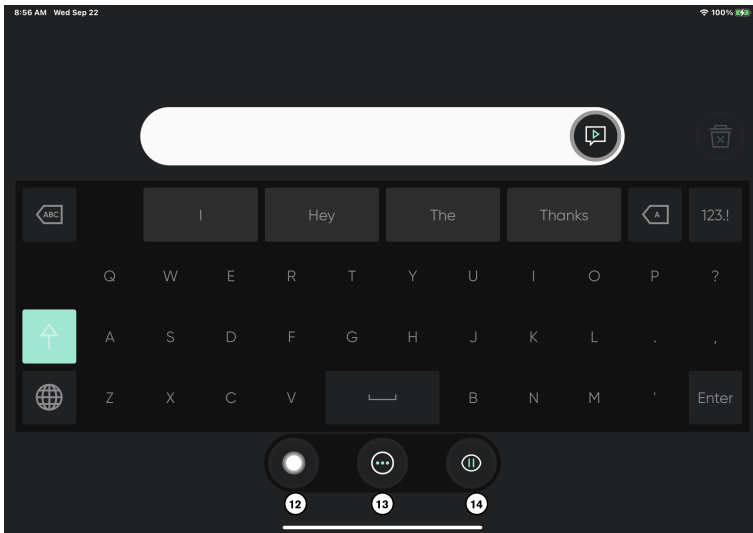

Afbeelding 3.2 Offscreenmenu van TD Talk


| Positie | Beschrijving                                                                                                                      | Positie | Beschrijving                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12      | <b>AssistiveTouch</b><br>Schakelt AssistiveTouch in. Gebruik AssistiveTouch om naar het startscherm en al uw andere apps te gaan. | 14      | <b>Oogbesturing pauzeren/hervatten</b><br>Schakelknop om oogbesturing tijdelijk te pauzeren en te hervatten. |
| 13      | <b>Meer</b><br>Gaat naar het Dashboard en Instellingen.                                                                           |         |                                                                                                              |

### 3.2.1 Hoe open ik het offscreenmenu in TD Talk?

Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het Offscreenmenu in TD Talk:

- **Als gebruiker:** Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.
- **Als zorgverlener:** Veeg omhoog vanaf de letter **T** op het TD Talk-toetsenbord.

## 3.3 Dashboard

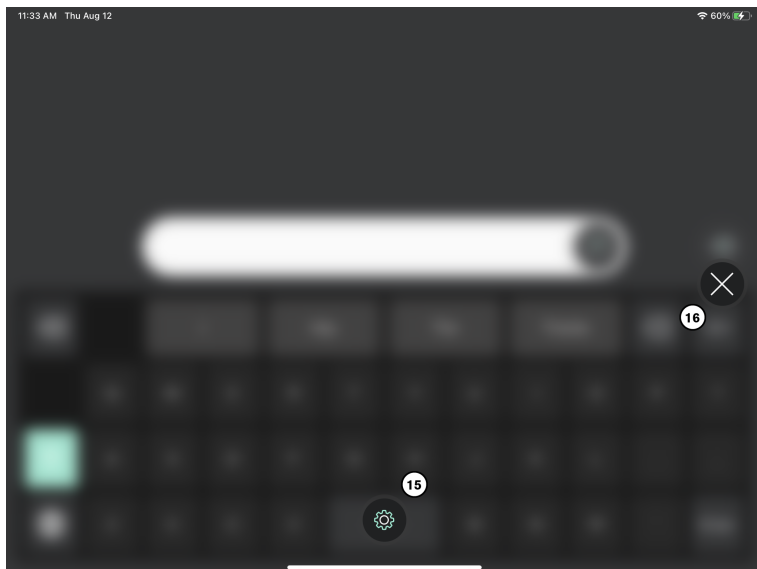

Afbeelding 3.3 TD Talk-dashboard

| Positie | Beschrijving                                                                          | Positie | Beschrijving                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 15      | <b>Instellingen TD Talk</b><br>Zie 5 <i>Instellingen TD Talk</i> voor meer informatie | 16      | <b>Het dashboard afsluiten</b><br>Selecteer de knop om het dashboard af te sluiten. |

### 3.3.1 Hoe open ik het dashboard in TD Talk?

- U kunt de instellingen op een van de volgende manieren openen:
  - Als gebruiker:** Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.
  - Als zorgverlener:** Veeg omhoog vanaf de letter **T** op het TD Talk-toetsenbord.

De knop  (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

- Selecteer de knop  (Meer) om Meer te openen.

### 3.3.2 Hoe sluit ik TD Talk af?

- U kunt de instellingen op een van de volgende manieren openen:
  - Als gebruiker:** Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.
  - Als zorgverlener:** Veeg omhoog vanaf de letter **T** op het TD Talk-toetsenbord.

De knop  (AssistiveTouch) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

- Selecteer de knop  (AssistiveTouch) om het AssistiveTouch-menu te openen.
- Selecteer de knop  (Startpagina) in het AssistiveTouch-menu.

## 3.4 TD Talk instellen

1. Selecteer de app  TD Talk op het startscherm of het iPadOS-apparaat.
2. U kunt de instellingen op een van de volgende manieren openen:
  - **Als gebruiker:** Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.
  - **Als zorgverlener:** Veeg omhoog vanaf de letter T op het TD Talk-toetsenbord.

De knop  (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

3. Selecteer de knop  (Meer) om Meer te openen.
4. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
5. Stel de taal van de TD Talk-applicatie in:

- a. Selecteer de knop  (Volgend scherm) aan de rechterkant.
- b. Zoek naar het pictogram  (Algemeen) om de juiste instellingenkaart te vinden.
- c. Selecteer de knop **Openen**.
- d. Kijk in het gedeelte **Applicatietaal**.
- e. Selecteer het keuzerondje naast de taal waarin u de applicatie wilt gebruiken.

- f. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
6. Selecteer de te gebruiken stemmen:

- a. Zoek naar het pictogram  (Stem) om de juiste instellingenkaart te vinden.
- b. Selecteer de knop **Openen**.
- c. Kijk in het gedeelte **Uw stemmen**.
- d. Selecteer het keuzerondje onder de geïnstalleerde taal die u wilt spreken.

 Ga naar 5.2.3.1 *Hoe kan ik een nieuwe taal/toetsenbordtaal toevoegen/downloaden in TD Talk?*, pagina 21 en 5.2.3.2 *Hoe selecteer en activeer ik de toetsenbordtalen die ik wil gebruiken/beschikbaar wil maken in TD Talk?*, pagina 22 als u de gewenste taal niet kunt vinden.

- e. Selecteer het keuzerondje naast de gewenste stem in de lijst met beschikbare stemmen voor de te spreken taal.  
Gebruik de knoppen 'Omhoog bladeren' en 'Omlaag bladeren' aan de rechterkant om door de lijst met beschikbare stemmen voor de taal te bladeren.

 Selecteer  naast de stem om deze uit te proberen. Indien beschikbaar.

 Als u een  (download) in plaats van een keuzerondje ziet, selecteert u de knop om de stem te downloaden.


- f. Herhaal de stappen **d** en **e** als u in meer dan één taal wilt kunnen spreken.

7. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.



In TD Talk kunt u snel tussen de geselecteerde talen schakelen door de knop  linksonder op het toetsenbord te selecteren.

## 4 TD Talk gebruiken

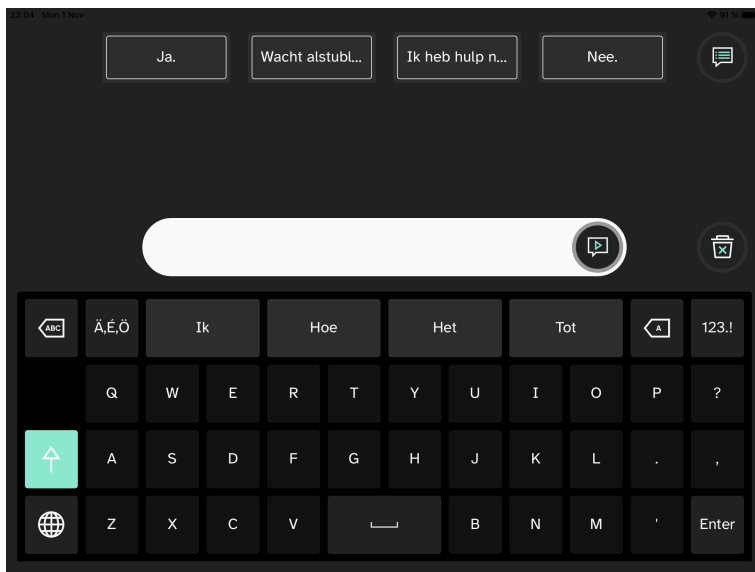

Afbeelding 4.1 TD Talk

### 4.1 Het toetsenbord gebruiken

Selecteer letters op het toetsenbord. Woorden en zinnen worden geformuleerd (of gebouwd) in het berichtenvenster.

Selecteer de knop  (Spreken) wanneer u klaar bent om te spreken.


### 4.2 Voorspellingen gebruiken

TD Talk biedt zowel woordvoorspelling als zinsvoorspelling, waardoor er minder inspanning is vereist en/of er sneller berichten worden gegenereerd.

#### 4.2.1 Woordvoorspellingen

De engine voor woordvoorspelling die in TD Talk wordt gebruikt, is afkomstig van SwiftKey™ en wordt vaak gebruikt op tablets en smartphones. SwiftKey™ maakt gebruik van verschillende technologieën voor kunstmatige intelligentie, waarmee het volgende woord dat de gebruiker wil typen, kan worden voorspeld. SwiftKey™ leert van eerdere teksten die

de gebruiker heeft geschreven en biedt of toont presenteert voorspellingen op basis van de huidige invoertekst en wat deze heeft geleerd. De taal voor woordvoorspelling varieert naargelang de instelling van Toetsenbordtaal.

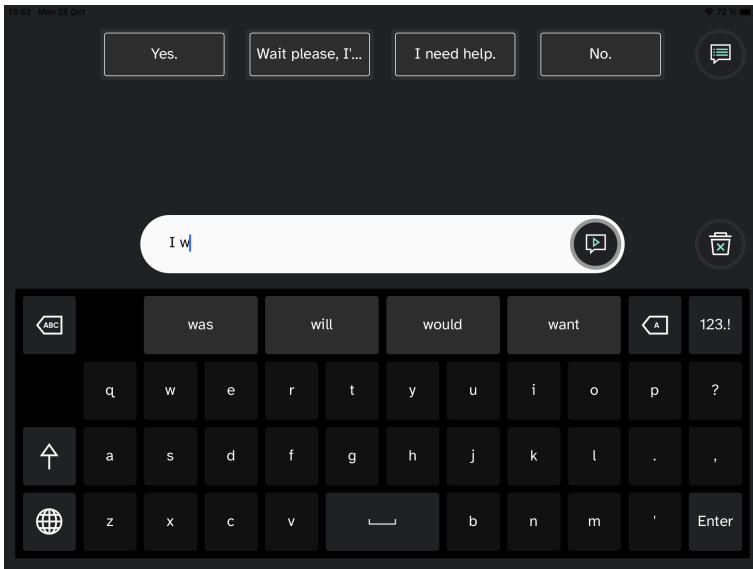


Wanneer u woordvoorspelling gebruikt, worden er vier (4) vakjes weergegeven boven het toetsenbord. Het uiterst linkse vakje geeft het meest waarschijnlijke voorspelde woord weer, en de overige drie (3) vakjes bevatten elk één voorspeld woord. U kunt een voorspeld woord selecteren door het betreffende vakje te selecteren. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, typt u gewoon verder, en het betreffende woord wordt na invoer van het volgende teken weergegeven.

Als u Woordvoorspelling gebruikt en een woord met een accent, zoals café, wilt typen, bespaart u tijd en moeite door het accent over te laten aan Woordvoorspelling. Typ gewoon 'cafe', en een van de suggesties is dan 'café'.

## 4.2.2 Zinvoorspelling

TD Talk leert en analyseert na verloop van tijd hoe u spreekt. Woordvoorspelling leert de woorden die u zegt.

Zinsvoorspelling leert hoe u deze woorden samenvoegt tot een persoonlijke zinnenset. Wanneer u begint te typen, worden de voorspelde zinnen uit uw zinnenset in het grijs weergegeven in het Berichtenvenster.

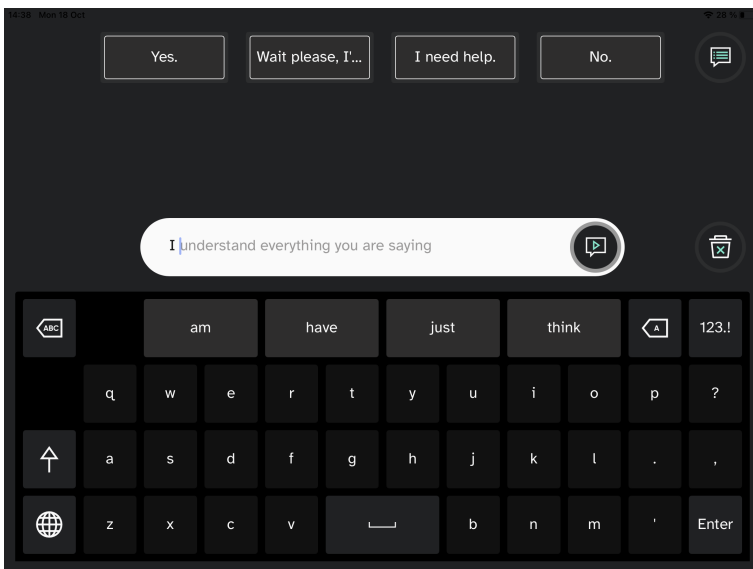


Selecteer een voorspelde zin door de blik erop te richten. De kleur van de zin verandert van grijs naar zwart om aan te geven dat de zin is geselecteerd. De zin kan nu worden uitgesproken of bewerkt.

## 4.3 Een bericht bewerken

### 4.3.1 Hoe bewerk ik een bericht?

1. Kijk naar de tekst in het Berichtenvenster. Het menu Bewerken wordt geopend.

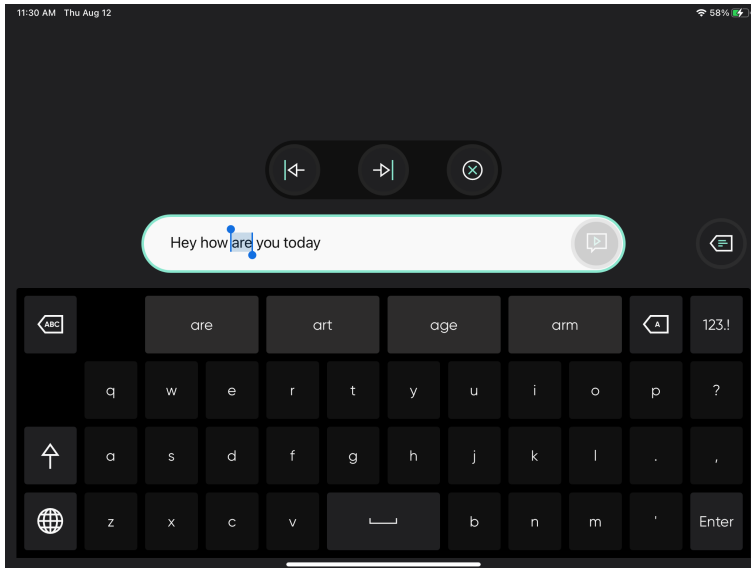

2. Gebruik de pijlen  (links) en  (rechts) om te navigeren naar de plaats waar u de wijziging wilt aanbrengen.
3. Gebruik het toetsenbord of Woordvoorspelling om de wijziging door te voeren.
4. Selecteer de knop  (Sluiten) om de Bewerkingsmodus te sluiten.

## 4.4 Korte berichten gebruiken

### 4.4.1 Hoe gebruik ik korte berichten TD Talk?

Er zijn twee (2) soorten korte berichten. De eerste zijn altijd zichtbaar op het startscherm. De tweede bevinden zich onder


de knop  (Meer korte berichten).

#### Korte berichten op het startscherm

1. Selecteer **Korte berichten** te spreken.  
Het geselecteerde bericht wordt onmiddellijk uitgesproken zonder dat het wordt toegevoegd aan het berichtenvenster en zonder dat het een bericht beïnvloedt dat u aan het bewerken bent.

## Meer korte berichten

1. Selecteer de knop  (Meer korte berichten).

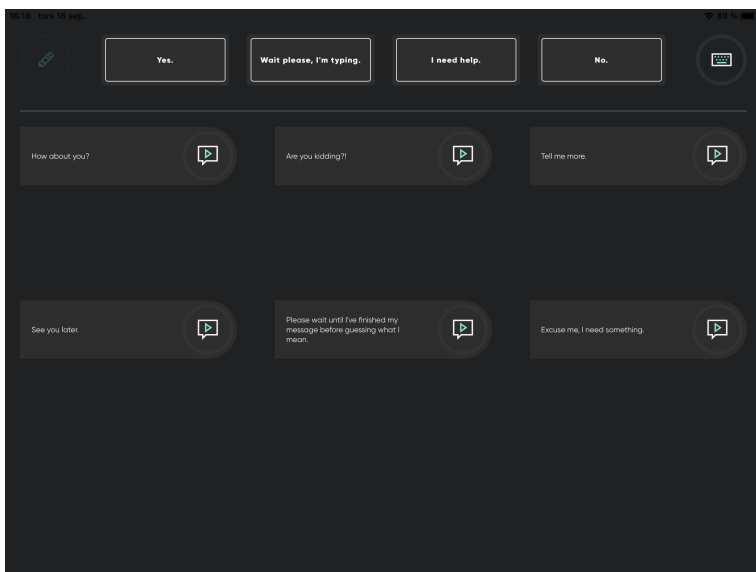

2. Selecteer de knop  (Spreken) naast het bericht.
3. Selecteer de knop  (Toetsenbord) om terug te keren naar het startscherm.

### 4.4.2 Hoe kan ik de korte berichten TD Talk bewerken?

1. Selecteer de knop  (Meer korte berichten).
2. Selecteer de knop  (Bewerken).
3. Selecteer de knop  (Bewerken) naast het te bewerken bericht.
4. Breng de wijzigingen in het bericht aan met het toetsenbord.
5. Selecteer de knop  (Opslaan) om de wijzigingen in het korte bericht op te slaan.
6. Selecteer de knop  (Afsluiten) om de bewerkingsweergave te sluiten.
7. Selecteer de knop  (Toetsenbord) om terug te keren naar het startscherm.

### 4.4.3 Hoe voeg ik een kort bericht TD Talk toe?

1. Selecteer de knop  (Meer korte berichten).
2. Selecteer de knop  (Bewerken).
3. Selecteer de knop  (Toevoegen) naast Nieuwe locatie toevoegen.
4. Schrijven het nieuwe bericht met het toetsenbord.

5. Selecteer de knop  (Opslaan) om de wijzigingen in het korte bericht op te slaan.
6. Selecteer de knop  (Afsluiten) om de bewerkingsweergave te sluiten.
7. Selecteer de knop  (Toetsenbord) om terug te keren naar het startscherm.

#### 4.4.4 Hoe verwijder ik een kort bericht in TD Talk?


1. Selecteer de knop  (Meer korte berichten).
2. Selecteer de knop  (Bewerken).
3. Selecteer de knop  (Bewerken) naast het te verwijderen bericht.
4. Selecteer de knop  Bericht verwijderen.
5. Selecteer de knop  (Opslaan) om de wijzigingen in het korte bericht op te slaan.
6. Selecteer de knop  (Afsluiten) om de bewerkingsweergave te sluiten.
7. Selecteer de knop  (Toetsenbord) om terug te keren naar het startscherm.

## 4.5 De taal wijzigen

### 4.5.1 Hoe wijzig ik snel de te spreken taal in TD Talk?

1. Selecteer de knop  (Taal) op het toetsenbord.
2. Selecteer de te spreken taal  
Als u de gewenste taal niet kunt vinden, raadpleegt u *5.2.3.1 Hoe kan ik een nieuwe taal/toetsenbordtaal toevoegen/downloaden in TD Talk?*, pagina 21
3. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan

## 5 Instellingen TD Talk

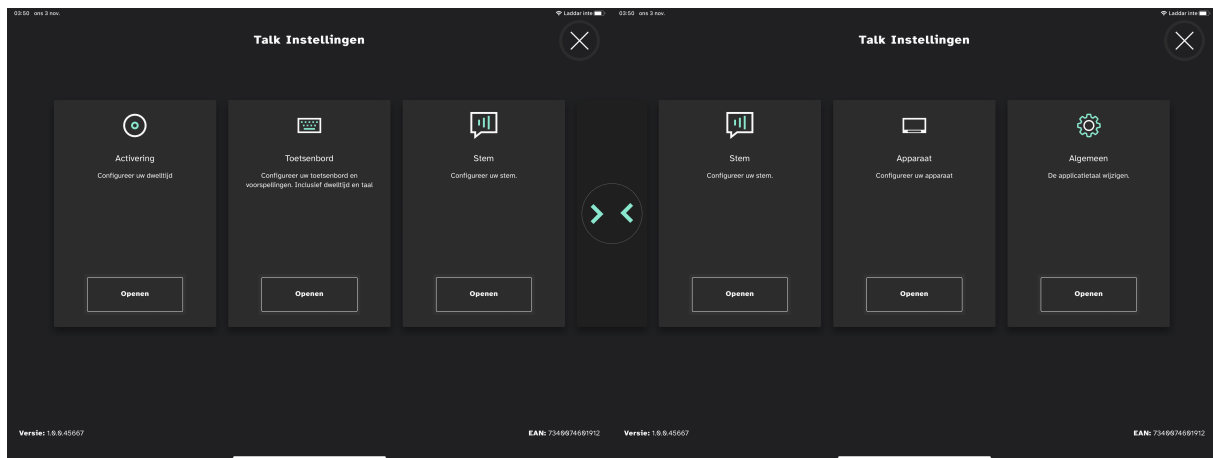


| Pictogrammen                                                                        | Actie       | Beschrijving                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Activering  | Alleen beschikbaar als een oogbesturingsmodule is geïnstalleerd en geactiveerd.<br>Opent de instellingen voor <b>Activering</b> .<br>Zie 5.1 <i>Activering</i> , pagina 17 voor meer informatie. |
|  | Toetsenbord | Opent de instellingen voor <b>Toetsenbord</b> .<br>Zie 5.2 <i>Toetsenbord</i> , pagina 19 voor meer informatie.                                                                                  |
|  | Stem        | Opent de instellingen voor <b>Spraak</b> .<br>Zie 5.3 <i>Stem</i> , pagina 23 voor meer informatie.                                                                                              |
|  | Apparaat    | Alleen beschikbaar op de TD Pilot.<br>Opent de <b>Apparaat</b> -instellingen.<br>Zie 5.4 <i>Apparaat</i> , pagina 25 voor meer informatie.                                                       |
|  | Algemeen    | Opent de <b>Algemene</b> instellingen.<br>Zie 5.5 <i>Algemeen</i> , pagina 27 voor meer informatie.                                                                                              |

## 5.1 Activering



Alleen beschikbaar als een oogbesturingsmodule is geïnstalleerd en geactiveerd.

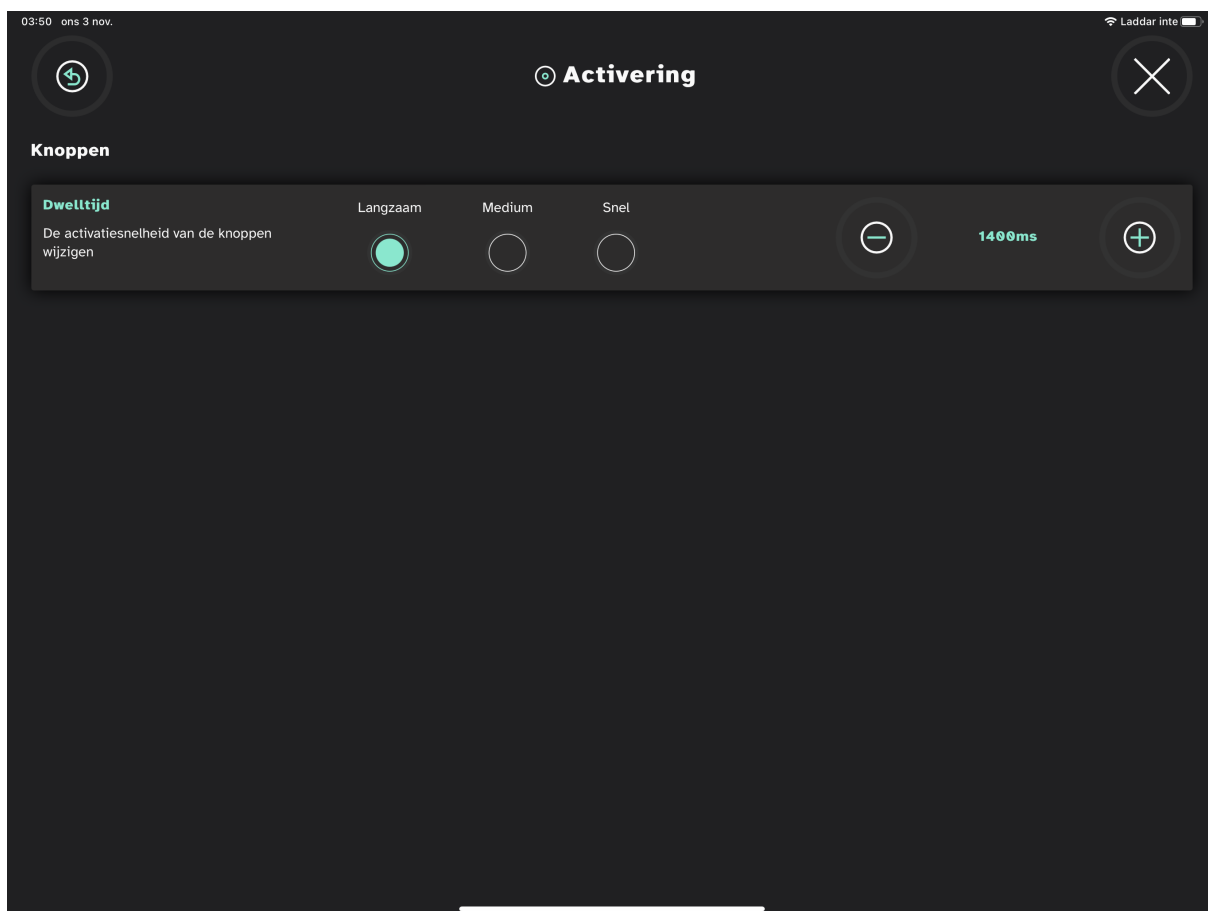

### 5.1.1 Knoppen

#### 5.1.1.1 Hoe wijzig ik de dwelltijd voor het activeren van knoppen in TD Talk?



Knoppen verwijst niet naar de knoppen op het toetsenbord, maar naar de knoppen die zich op alle andere plaatsen in TD Talk bevinden.

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Meer) om Meer te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Activering) om de juiste instellingenkaart te vinden.

5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Knoppen**.
7. Selecteer het keuzerondje voor de **Dwelltijd** voor een van de volgende waarden:
  - Langzaam
  - **Gemiddeld** (standaard)
  - Snel

8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

#### 5.1.1.2 Hoe stel ik de dwelltijd voor het activeren van knoppen in TD Talk fijn af?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.


2. Selecteer de knop  (Meer) om Meer te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Activering) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Knoppen**.
7. Selecteer een van de volgende toetsen om de **dwelltijd** fijn af te stellen:

-  — om de dwelltijd te verlagen
-  — om de dwelltijd te verhogen

De waarde kan worden gewijzigd tussen 200 ms en oneindig

8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

## 5.2 Toetsenbord

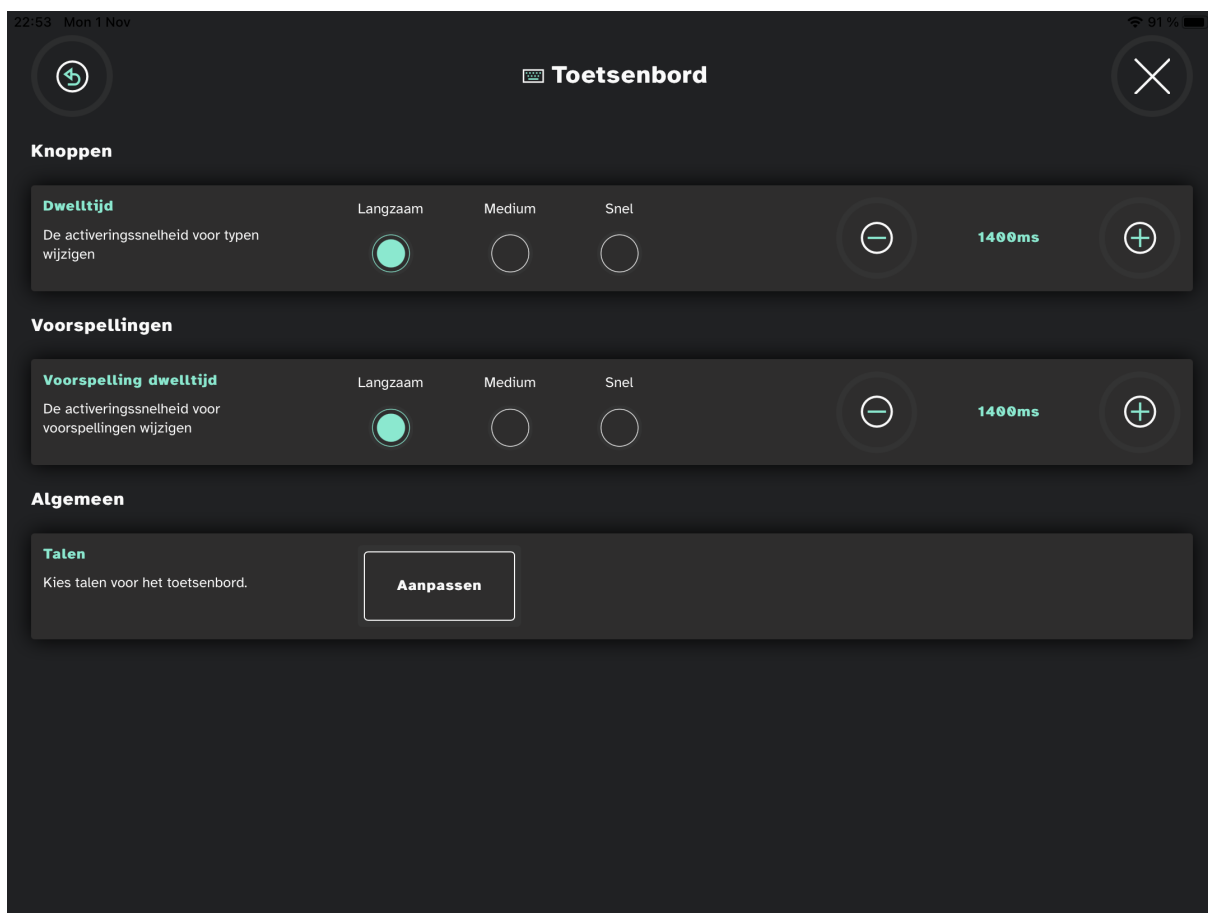

### 5.2.1 Knoppen

#### 5.2.1.1 Hoe wijzig ik de dwelltijd voor toetsenbordknoppen in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Meer) om Meer te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram  (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Knoppen**.
7. Selecteer het keuzerondje voor de **Dwelltijd** voor een van de volgende waarden:

- Langzaam
- **Gemiddeld** (standaard)
- Snel

8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

### 5.2.1.2 Hoe stel ik de dweltijd voor het activeren van knoppen in TD Talk fijn af?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Meer) om Meer te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Knoppen**.
7. Selecteer een van de volgende keuzerondjes om de **dweltijd** fijn af te stellen:

-  — om de dweltijd te verlagen
-  — om de dweltijd te verhogen

De waarde kan worden gewijzigd tussen 200 ms en oneindig

8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

## 5.2.2 Voorspelling

### 5.2.2.1 Hoe wijzig ik de dweltijd voor voorspellingsknoppen in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Meer) om Meer te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Voorspelling**.
7. Selecteer het keuzerondje voor de **Dweltijd** voor een van de volgende waarden:
  - Langzaam
  - **Gemiddeld** (standaard)
  - Snel

8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

#### 5.2.2.2 Hoe stel ik de dweltijd voor de voorspellingsknoppen in TD Talk fijn af?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Meer) om Meer te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Voorspelling**.
7. Selecteer een van de volgende keuzerondjes om de **dweltijd** fijn af te stellen:

-  — om de dweltijd te verlagen
-  — om de dweltijd te verhogen

De waarde kan worden gewijzigd tussen 200 ms en oneindig

8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

### 5.2.3 Algemeen

#### 5.2.3.1 Hoe kan ik een nieuwe taal/toetsenbordtaal toevoegen/downloaden in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Meer) om Meer te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Algemeen**.
7. Selecteer de knop 'Toetsenbordtaal kiezen' **toevoegen/wijzigen** button.
8. Selecteer het tabblad **Downloaden**.
9. Selecteer de knop  (Downloaden) naast de taal om het nieuwe toetsenbord te downloaden.
10. Selecteer de knop **Downloaden** om de download te starten of de knop **Annuleren** om de download te annuleren.
11. Selecteer het tabblad **Geïnstalleerd**.

12. Selecteer het keuzerondje naast de talen om de taal te activeren.

13. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

14. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

### 5.2.3.2 Hoe selecteer en activeer ik de toetsenbordtalen die ik wil gebruiken/beschikbaar wil maken in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Meer) om Meer te openen.

3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram  (Toetsenbord) om de juiste instellingenkaart te vinden.

5. Selecteer de knop **Openen**.

6. Selecteer de knop 'Toetsenbordtaal kiezen' **toevoegen/wijzigen** button.

7. Selecteer het tabblad **Geïnstalleerd**.

8. Selecteer het keuzerondje naast de talen om de toetsenbordtaal voor die talen te activeren.




Zorg ervoor dat u het keuzerondje selecteert voor alle talen waarvoor u een stem beschikbaar wilt hebben.

9. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

10. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

## 5.3 Stem

Hier kunt u de stem van de te spreken taal instellen.

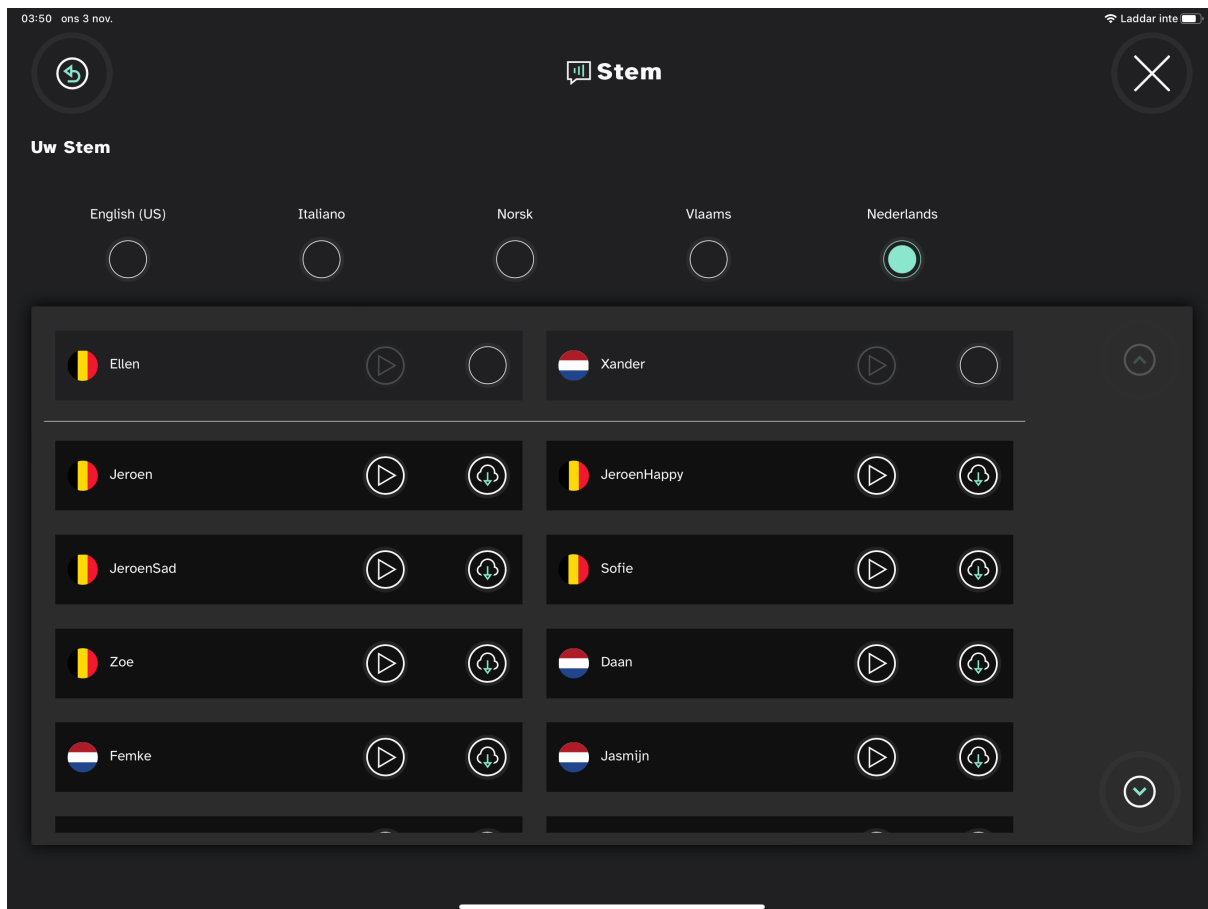

Alle geïnstalleerde talen worden weergegeven in het bovenste deel van het scherm. Als de taal is geselecteerd, worden de beschikbare stemmen voor die taal weergegeven in de lijst onder de talen. Om een stem uit te proberen, selecteert u



naast de stem om deze uit te proberen. Indien beschikbaar.

### 5.3.1 Hoe selecteer ik mijn stem in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.



De knop (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Meer) om Meer te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Stem) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Uw stemmen**.
7. Selecteer het keuzerondje onder de geïnstalleerde taal die u wilt spreken.



Ga naar 5.2.3.1 *Hoe kan ik een nieuwe taal/toetsenbordtaal toevoegen/downloaden in TD Talk?*, pagina 21 en 5.2.3.2 *Hoe selecteer en activeer ik de toetsenbordtalen die ik wil gebruiken/beschikbaar wil maken in TD Talk?*, pagina 22 als u de gewenste taal niet kunt vinden.

8. Selecteer de gewenste stem in de lijst met beschikbare stemmen voor de te spreken taal. Gebruik de knoppen 'Omhoog bladeren' en 'Omlaag bladeren' aan de rechterkant om door de lijst met beschikbare stemmen voor de taal te bladeren.



Selecteer  naast de stem om deze uit te proberen.

9. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

10. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

## 5.3.2 Hoe download ik een nieuwe stem in TD Talk?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Meer) om Meer te openen.

3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram  (Stem) om de juiste instellingenkaart te vinden.

5. Selecteer de knop **Openen**.

6. Kijk in het gedeelte **Uw stemmen**.

7. Selecteer het keuzerondje onder de geïnstalleerde taal die u wilt spreken.



Ga naar 5.2.3.1 *Hoe kan ik een nieuwe taal/toetsenbordtaal toevoegen/downloaden in TD Talk?*, pagina 21 en 5.2.3.2 *Hoe selecteer en activeer ik de toetsenbordtalen die ik wil gebruiken/beschikbaar wil maken in TD Talk?*, pagina 22 als u de gewenste taal niet kunt vinden.

8. Selecteer de knop  (Downloaden) naast de taal om het nieuwe toetsenbord te downloaden. Gebruik de knoppen 'Omhoog bladeren' en 'Omlaag bladeren' aan de rechterkant om door de lijst met beschikbare stemmen voor de taal te bladeren.



Selecteer  naast de stem om deze uit te proberen.

9. Selecteer de knop **Downloaden** om de download te starten of de knop **Annuleren** om de download te annuleren.
10. Selecteer de gewenste stem in de lijst met beschikbare stemmen voor de te spreken taal.


11. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

12. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

## 5.4 Apparaat



Alleen beschikbaar op de TD Pilot.

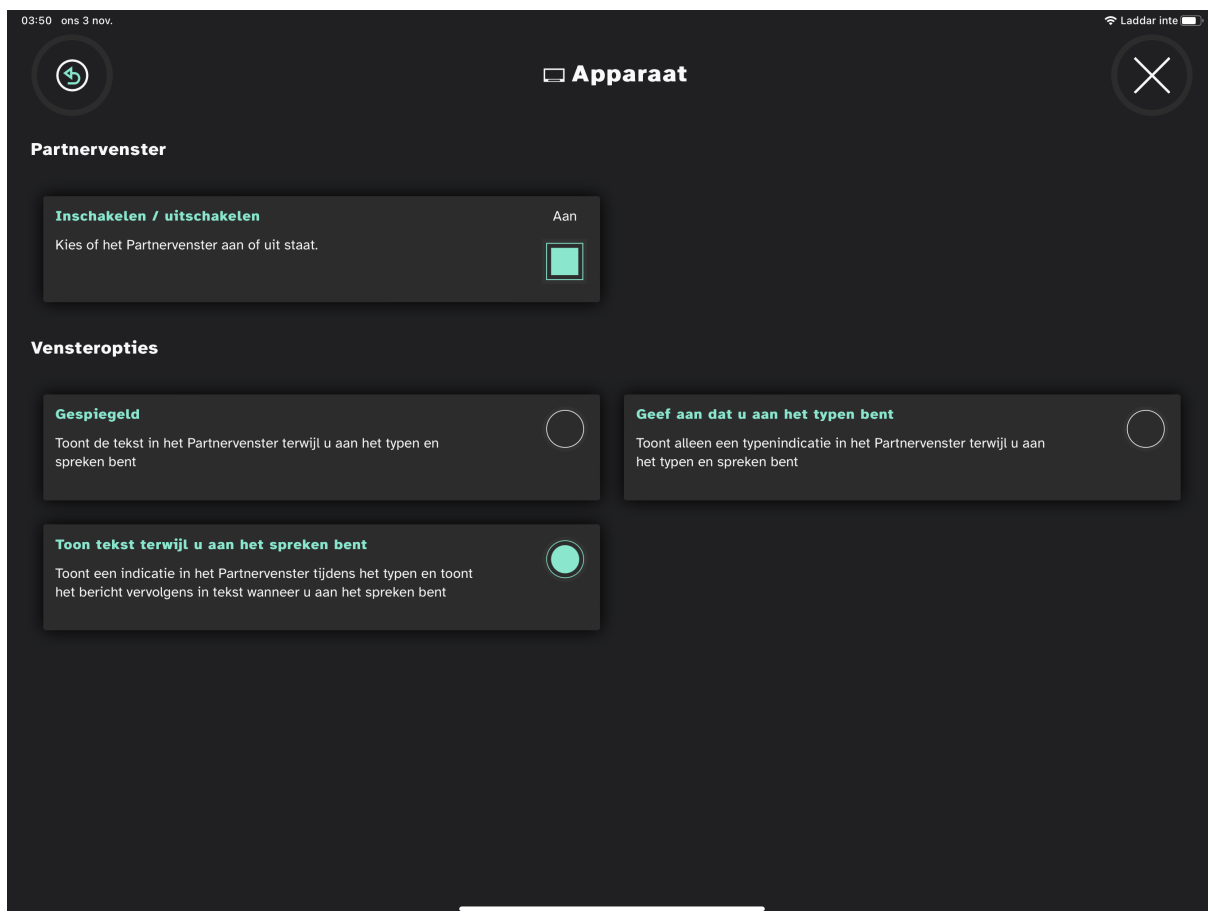

### 5.4.1 Partnervenster

#### 5.4.1.1 Hoe schakel ik het partnervenster in TD Talk in of uit?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Meer) om Meer te openen.

3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.

4. Zoek naar het pictogram  (Apparaat) om de juiste instellingenkaart te vinden.

5. Selecteer de knop **Openen**.

6. Kijk in het gedeelte **Partnervenster**.

7. Schakel de knop **Inschakelen/uitschakelen** voor '**Kiezen of Partnervenster is in- of uitgeschakeld**' naar:
  - Aan

- Uit

8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.


#### 5.4.1.2 Hoe stel ik de weergaveopties voor het partnervenster in TD Talk in?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Meer) om Meer te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Zoek naar het pictogram  (Apparaat) om de juiste instellingenkaart te vinden.
5. Selecteer de knop **Openen**.
6. Kijk in het gedeelte **Weergaveopties**.
7. Selecteer een van de volgende keuzerondjes om de weergaveoptie voor het Partnervenster te kiezen:
  - Gespiegeld: geeft de tekst in het Partnervenster weer terwijl u aan het typen en spreken bent.
  - Tekst weergeven tijdens spreken: geeft een indicatie weer in het Partnervenster tijdens het typen en geeft het bericht weer in tekst tijdens het spreken.
  - Typen aangeven: geeft alleen een type-indicator weer in het Partnervenster tijdens het typen en spreken.
8. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.
9. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.

## 5.5 Algemeen

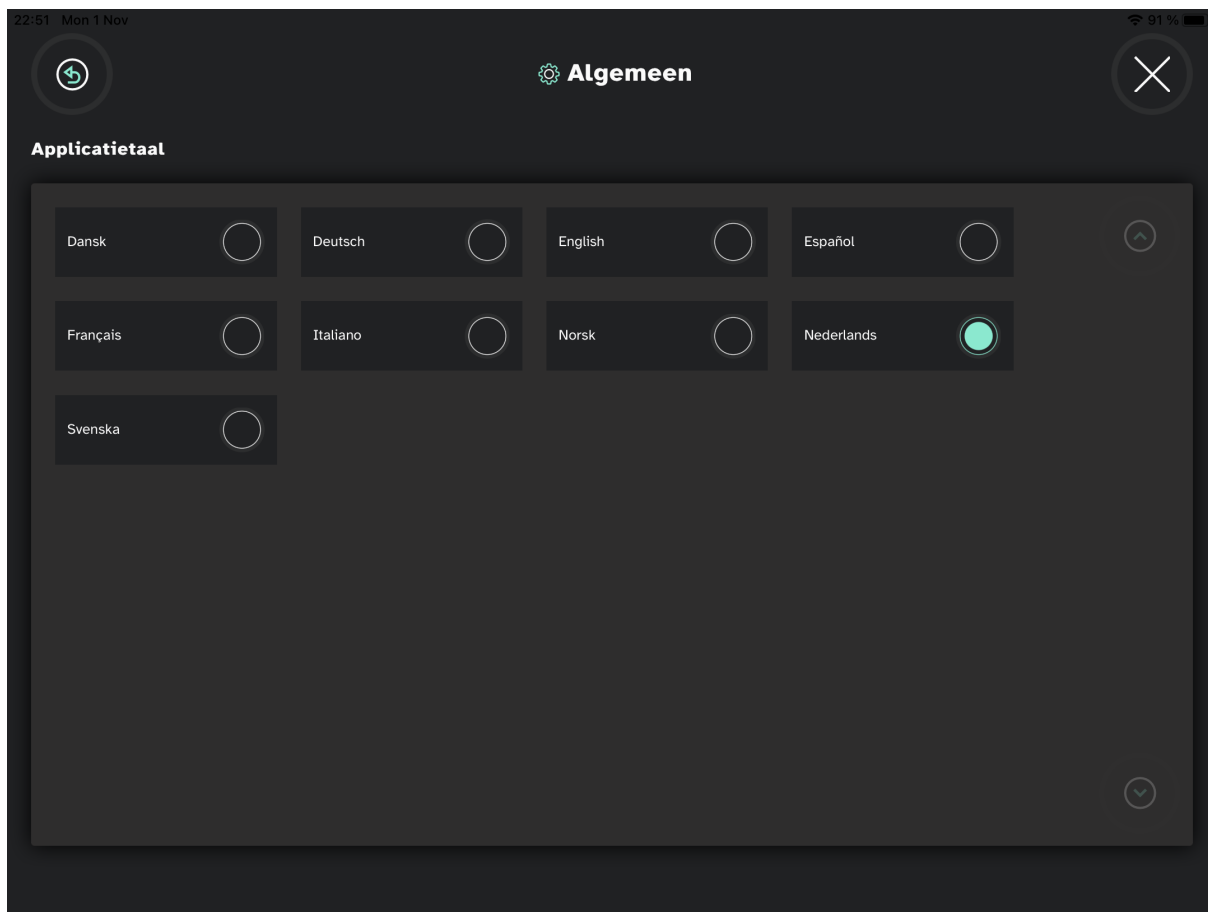

### 5.5.1 Hoe stel ik mijn applicatietaal in TD Talk in?

1. Richt uw blik onder het scherm, op het midden van de oogbesturingsmodule of op het gebied van de oogbesturingsmodule.

De knop  (Meer) wordt zichtbaar onderaan het middelste deel van het scherm.

2. Selecteer de knop  (Meer) om Meer te openen.
3. Selecteer de actie  (Instellingen) om de TD Talk-instellingen te openen.
4. Selecteer de knop  (Volgend scherm) aan de rechterkant.
5. Zoek naar het pictogram  (Algemeen) om de juiste instellingenkaart te vinden.
6. Selecteer de knop **Openen**.
7. Kijk in het gedeelte **Applicatietaal**.
8. Selecteer het keuzerondje naast de taal waarin u de applicatie wilt gebruiken.
9. Selecteer de knop  (Vorige) om terug te gaan naar TD Talk-instellingen.

10. Selecteer de knop  (Sluiten) om TD Talk-instellingen af te sluiten.



Copyright ©Tobii Dynavox AB. Niet alle producten en diensten worden op elke lokale markt aangeboden. Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Alle handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren.

## Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox-apparaat

### Online help

Raadpleeg de productspecifieke supportpagina voor uw Tobii Dynavox-apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product. Onze supportpagina's vindt u online op: [www.TobiiDynavox.com/support-training](http://www.TobiiDynavox.com/support-training)

### Neem contact op met uw productadviseur of wederverkoper

Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox-productadviseur of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactinformatie naar [www.TobiiDynavox.com/contact](http://www.TobiiDynavox.com/contact)