

TD Talk

Bruksanvisning



Bruksanvisning TD Talk

Utgåva 1.0

11/2021

Alla rättigheter förbehålles.

Copyright © Tobii AB (publ)

Ingen del av detta dokument får reproduceras, lagras i ett söksystem eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, genom fotokopiering, inspelning eller på annat sätt) utan föregående skriftligt medgivande från utgivaren.

Upphovsrättsskyddet omfattar alla former och typer av upphovsrättsligt material och information som tillåts av lagstadgad eller rättslig lag eller som härfter beviljas, inklusive, utan begränsning, material som genererats av programvara som visas på skärmen så som skärmbilder, menyer, osv.

Informationen i det här dokumentet tillhör Tobii Dynavox. All kopiering av hela eller delar av materialet utan föregående skriftligt tillåtelse från Tobii Dynavox är förbjuden.

Produkter som det här dokumentet hänvisar till kan vara varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. Utgivaren och upphovsmannen gör inga anspråk på dessa varumärken.

Största möda har lagts ned på arbetet med det här dokumentet. Utgivaren och upphovsmannen friskriver sig dock från allt ansvar för fel eller utelämnad information, eller för skador till följd av hur informationen i detta dokument, eller de program och den källkod som kan medfölja dokumentet, används. Utgivaren och författaren ska på inget sätt kunna hållas skadeskyldiga för eventuell inkomstförlust eller kommersiell skada som direkt eller indirekt har orsakats av, eller har påståtts orsakats av, detta dokument.

Innehållet kan ändras utan föregående meddelande.

Besök Tobii Dynavox webbplats på

www.TobiiDynavox.com för uppdaterade versioner av det här dokumentet.

Kontaktinformation:

Tobii Dynavox AB
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Sverige

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
United Kingdom

+46 8 663 69 90

TingDao Electronics Science & Technology (Suzhou) Co., LTD
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP, Suzhou
P.R.China 215021


+86 512 69362880



Innehållsförteckning

1	Välkommen	4
1.1	Systemkrav	4
1.2	Stödda språk	4
1.3	Skaffa TD Progressive Suite	4
2	Resurser och hjälpmedel	5
2.1	Webbresurser och hjälpmedel	5
2.2	myTobiiDynavox	5
2.3	Learning hub	5
3	Komma igång	6
3.1	Översikt över TD Talk	7
3.2	Menyn utanför skärmen	8
3.2.1	Hur får jag tillgång till Menyn utanför skärmen i TD Talk?	8
3.3	Instrumentpanel	9
3.3.1	Hur får jag åtkomst till instrumentpanelen i TD Talk?	9
3.3.2	Hur avslutar jag och stänger ner TD Talk?	9
3.4	Inställning av TD Talk	10
4	Användning av TD Talk	12
4.1	Använda tangentbordet	12
4.2	Användning av prediktioner	12
4.2.1	Ordprediktioner	12
4.2.2	Frasprediktion	13
4.3	Redigera ett meddelande	14
4.3.1	Hur redigerar jag ett meddelande?	14
4.4	Användning av Snabbmeddelanden	14
4.4.1	Hur använder jag Snabbmeddelanden TD Talk?	14
4.4.2	Hur kan jag redigera snabbmeddelanden TD Talk?	15
4.4.3	Hur kan jag lägga till ett snabbmeddelande TD Talk?	15
4.4.4	Hur kan jag ta bort ett snabbmeddelande i TD Talk?	16
4.5	Ändra språk	16
4.5.1	Hur ändrar jag snabbt språket för uppläsning TD Talk?	16
5	Inställningar av TD Talk	17
5.1	Aktivering	18
5.1.1	Knappar	18
5.2	Tangentbord	20
5.2.1	Knappar	20
5.2.2	Ordprediktion	21
5.2.3	Allmänt	22
5.3	Röst	24
5.3.1	Hur väljer jag min röst i TD Talk?	24
5.3.2	Hur laddar jag ner en ny röst i TD Talk?	25
5.4	Enhet	26
5.4.1	Partnerfönster	26
5.5	Allmänt	28
5.5.1	Hur ställer jag in mitt programspråk i TD Talk?	28

1 Välkommen

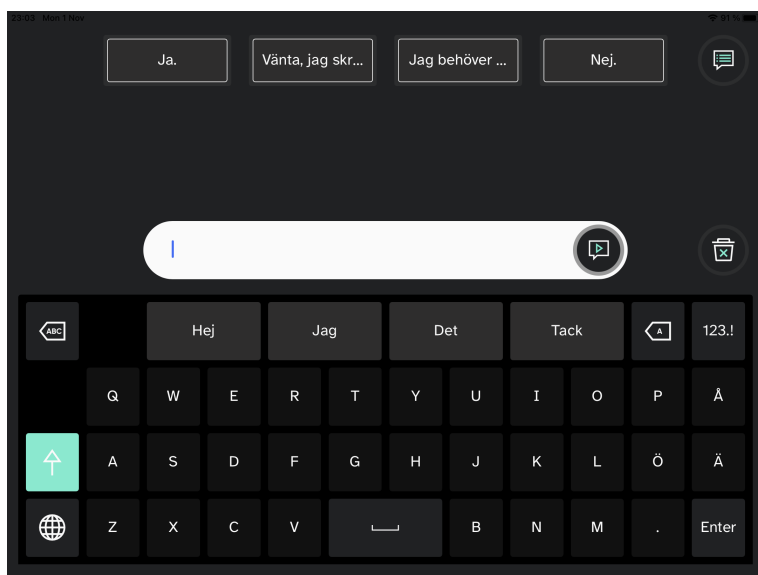

Figur 1.1 TD Talk

TD Talk ger människor möjlighet att kommunicera vem de är och vad de vill säga på ett så smidigt sätt som möjligt. Den är utformad för att göra meningskonstruktionen så snabb som möjligt, TD Talk gör det möjligt för dem som använder den att förbli en aktiv del av samtalet. TD Talk ser ut och känns bekant så att de som använder den kan komma igång på kortast möjliga tid. Genom att lära sig av hur en person kommunicerar anpassar TD Talk sig kontinuerligt för att se till att de kan säga exakt vad de vill säga.

1.1 Systemkrav

Tabell 1.1 iOS

	Operativsystem	Enhet	Minne	Pekstyrning	Camera/Kamera
Minimum	iOS 15,1	iPad 7:e generationen	4 GB	Inbyggd pekfunktion	Inbyggd kamera
Rekommenderat	iOS 15,1	iPad 8:e generationen	4 GB	Inbyggd pekfunktion	Inbyggd kamera

1.2 Stödda språk

- Danska (DK)
- Holländska (NL)
- Engelska (USA)
- Franska (FR)
- Tyska (DE)
- Italienska (IT)
- Norska (NO)
- Spanska (Latinamerika)
- Svenska (SE)
- Fler språk kommer inom kort!

1.3 Skaffa TD Progressive Suite

TD Talk är tillgänglig via Apple App Store för iPadOS.

2 Resurser och hjälpmedel

Tobii Dynavox erbjuder flera gratisresurser för att hjälpa till med och komplettera din upplevelse med TD Talk. Missa inte dessa redskap som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Tobii Dynavox programvara!

2.1 Webbresurser och hjälpmedel

Om du behöver hjälp, gå först till avsnittet Utbildning och support på Tobii Dynavox webbplats.

2.2 myTobiiDynavox

myTobiiDynavox är din personliga webbplats för lagring och delningsportal. Ladda upp dina säkerhetskopierade användarfiler till myTobiiDynavox för säker förvaring och för att dela med ditt eller användarens hela nätverk.

Gå till myTobiiDynavox.com för att registrera ett gratiskonto.

The logo for mytobiidynavox, featuring the text "mytobiidynavox" in white lowercase letters on a green rectangular background.

2.3 Learning hub



Inlärningsnavet finns för närvarande endast på engelska.

Besök learn.tobiidynavox.com för dokumentation, utbildning och andra resurser, inklusive:


- svar på vanliga frågor
- utbildningsvideor
- inspelade webbseminarier
- onlinekurser

3 Komma igång

Om TD Talk ska användas tillsammans med en ögonstyrningsenhet ska du se till att den har en aktiv kalibrering för ögonstyrningsenheten.

- iOS - använd TD CoPilot -appen för att ställa in ögonstyrningsenheten.
Mer information finns i användarhandboken för TD Pilot.


3.1 Översikt över TD Talk

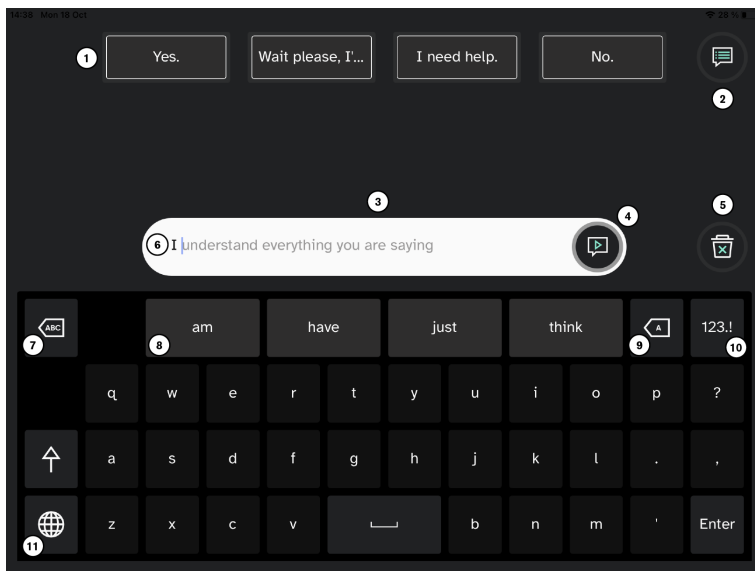

Figur 3.1 TD Talk

Placer- ing	Beskrivning	Placer- ing	Beskrivning
1	Snabbmeddelanden Förskrivna meddelanden som läses upp omedelbart när de väljs	7	Ta bort ord Ta bort ordet till vänster om markören.
2	Fler snabbmeddelanden Öppna snabbmeddelandesidan för att läsa upp eller redigera dina snabbmeddelanden.	8	Ordprediktion Förutsäger automatiskt ord baserat på vad du har skrivit hittills.
3	Meddelandefönster Här kan du visa och redigera den text som du vill läsa upp.	9	Backsteg Ta bort tecknet till vänster om markören.
4	Läs upp Läs upp texten i meddelandefönstret. Du kan också avbryta och återuppta uppläsningen.	10	Siffersida Tillgång till siffror och specialtecken.
5	Rensa Rensa all text i meddelandefönstret.	11	Ändra språk Växla mellan de språk du läser upp.
6	Frasprediktion TD Talk lär sig av vad du skriver och använder den informationen för att förutsäga fraser. Prediktion baseras på frekvens och gör kommunikationen snabbare och mer personlig.		

3.2 Menyn utanför skärmen

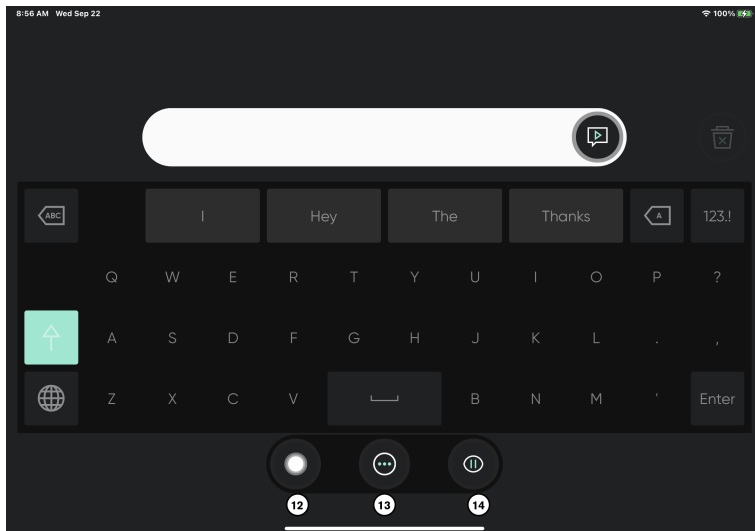

Figur 3.2 TD Talk Menyn utanför skärmen


Placer-ing	Beskrivning	Placer-ing	Beskrivning
12	AssistiveTouch Aktivera AssistiveTouch. Använd AssistiveTouch för att komma åt startsideskärmen och alla dina andra appar.	14	Pausa/återuppta blickstyrning Växelknapp för att tillfälligt pausa och återuppta blickstyrning.
13	Mer Gå till Instrumentpanelen och Inställningar.		

3.2.1 Hur får jag tillgång till Menyn utanför skärmen i TD Talk?

Det finns två sätt att komma åt Menyn utanför skärmen i TD Talk:

- **Som användare:** Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.
- **Som vårdgivare:** Svep uppåt från bokstaven **T** på TD Talk tangentbordet.

3.3 Instrumentpanel

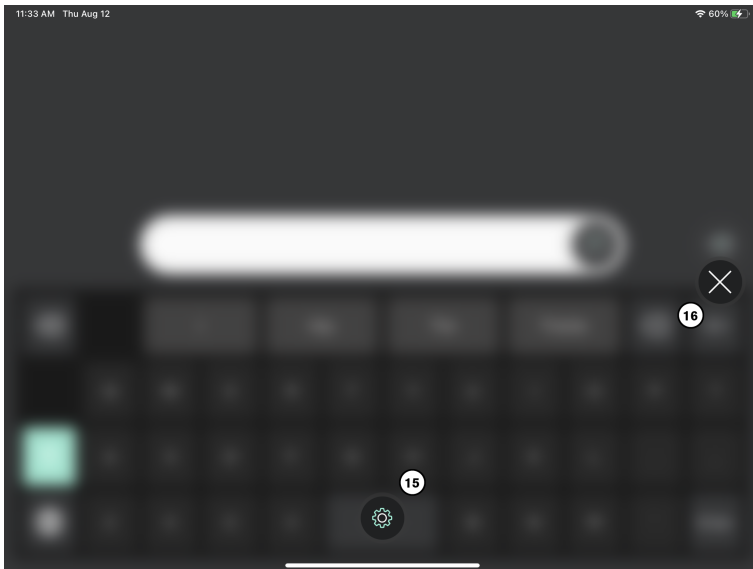

Figur 3.3 TD Talk Instrumentpanel

Placer- ing	Beskrivning	Placer- ing	Beskrivning
15	Inställningar av TD Talk Mer information finns i 5 <i>Inställningar av TD Talk</i>	16	Lämna instrumentpanelen Välj knappen för att lämna instrumentpanelen..

3.3.1 Hur får jag åtkomst till instrumentpanelen i TD Talk?

- Du kan få åtkomst till inställningarna på något av följande sätt:
 - Som användare:** Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.
 - Som vårdare:** Svep uppåt från bokstaven **T** på TD Talk tangentbordet.



(Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

- Välj knappen  (Mer) för att öppna Mer.

3.3.2 Hur avslutar jag och stänger ner TD Talk?

- Du kan få åtkomst till inställningarna på något av följande sätt:
 - Som användare:** Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.
 - Som vårdare:** Svep uppåt från bokstaven **T** på TD Talk tangentbordet.

(AssistiveTouch) knappen  blir synlig nere i mitten av skärmen.

- Välj knappen (AssistiveTouch)  för att öppna AssistiveTouch-menyn.
- Välj knappen (Startsida)  i AssistiveTouch-menyn.

3.4 Inställning av TD Talk

1. Välj  TD Talk -appen på iPadOS-enhetens startsideskärm.
2. Du kan få åtkomst till inställningarna på något av följande sätt:
 - **Som användare:** Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.
 - **Som vårdare:** Svep uppåt från bokstaven T på TD Talk tangentbordet.

Knappen  (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

3. Välj knappen  (Mer) för att öppna Mer.
4. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.
5. Ställ in programspråket för TD Talk :
 - a. Välj knappen  (Nästa skärm) på höger sida.
 - b. Leta efter ikonen  (Allmänt) för att hitta rätt inställningskort.
 - c. Välj knappen **Öppna** .
 - d. Titta i avsnittet **Programspråk** .
 - e. Välj radioknappen bredvid det språk du vill att programmet ska vara på.
 - f. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.
6. Välj den eller de röster som ska användas:
 - a. Leta efter (röst) ikonen  för att hitta rätt inställningskort.
 - b. Välj knappen **Öppna** .
 - c. Titta i avsnittet **Din röst/dina röster** .
 - d. Välj radioknappen under det installerade språket som du vill läsa upp.



Om det önskade språket saknas, se 5.2.3.1 *Hur lägger jag till/laddar ner ett nytt språk/tangentbordsspråk i TD Talk?*, sida 22 och 5.2.3.2 *Hur väljer och aktiverar jag tangentbordsspråken som jag vill använda/vara tillgänglig för i TD Talk?*, sida 23.

- e. Välj radioknappen bredvid den röst som ska användas i listan över tillgängliga röster för det språk som ska läsas upp.
Använd knapparna "Scroll up" och "Scroll down" till höger för att bläddra genom listan över tillgängliga röster för språket.



Om du vill prova en röst väljer du  bredvid rösten. Om tillgängligt.



Om det finns en  (nedladdning) i stället för en radioknapp väljer du knappen för att ladda ner rösten.

- f. Upprepa steg **d** och **e** om du vill kunna tala på fler än ett språk.

7. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.




I TD Talk kan du snabbt byta språk mellan de valda språken genom att välja knappen



i tangentbordets nedre vänstra hörn.

4 Användning av TD Talk

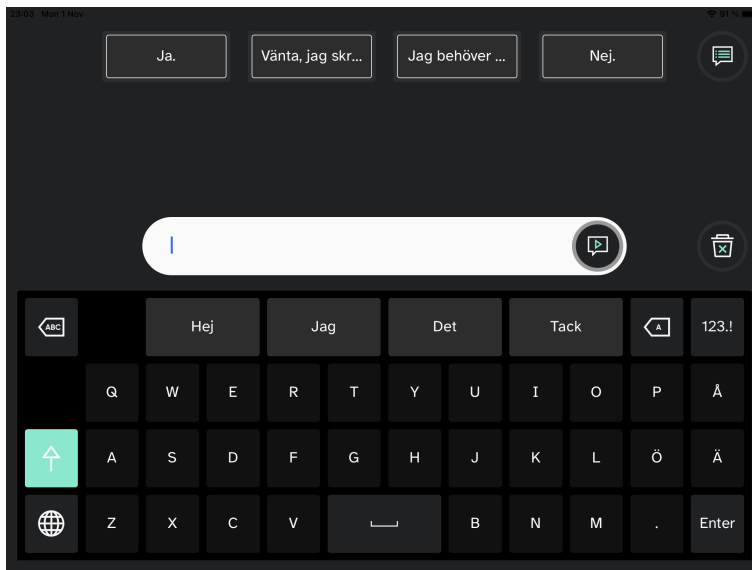

Figur 4.1 TD Talk

4.1 Använda tangentbordet

Välj bokstäver på tangentbordet, ord och meningar formuleras (eller byggs) i meddelandefönstret. Välj knappen  (Läs upp) när du är redo att läsa upp.


4.2 Användning av prediktioner

TD Talk erbjuder både ordprediktioner och frasprediktioner, vilket kan minska ansträngningen och/eller öka hastigheten för att producera meddelanden.

4.2.1 Ordprediktioner

Motorn för ordprediktion som används i TD Talk är från SwiftKey™ och används ofta i surfplattor och smarttelefoner. SwiftKey™ använder en blandning av artificiell intelligens för att förutse nästa ord som användaren tänker skriva. SwiftKey™ lär sig av tidigare texter som användaren har skrivit och erbjuder prediktioner eller presenterar prediktioner

baserat på den aktuella inmatade texten och vad den har lärt sig. Språket i ordprediktionen ändras beroende på språkställningen på tangentbordet.

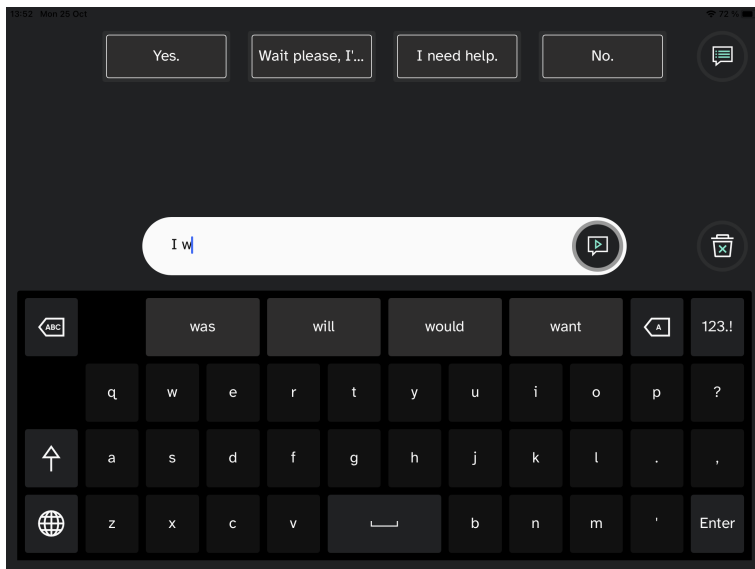


När ordprediktion används visas fyra (4) rutor ovanför tangentbordet. I rutan längst till vänster visas det mest sannolika ordförslaget och de återstående tre (3) rutorna innehåller ett ordförslag vardera. För att välja ett av de föreslagna orden väljer du ordets ruta. Om du inte hittar det ord du letar efter kan du fortsätta att skriva, så kanske ordet du letar efter dyker upp efter nästa tecken.

Om du använder ordprediktion och vill skriva ett ord som innehåller en accent, till exempel café, sparar du tid och ansträngning genom att låta ordprediktion ta hand om accenten. Skriv bara in "cafe", så får du ett förslag på "café".

4.2.2 Frasprediktion

TD Talk lär sig och analyserar hur du talar över tid. Ordprediktionen lär sig de ord du säger. Frasprediktion lär sig hur du sätter ihop dessa ord för att skapa en personlig frasuppsättning. När du börjar skriva kommer de föreslagna fraserna från din frasuppsättning att erbjudas i meddelandefönstret i grå text.

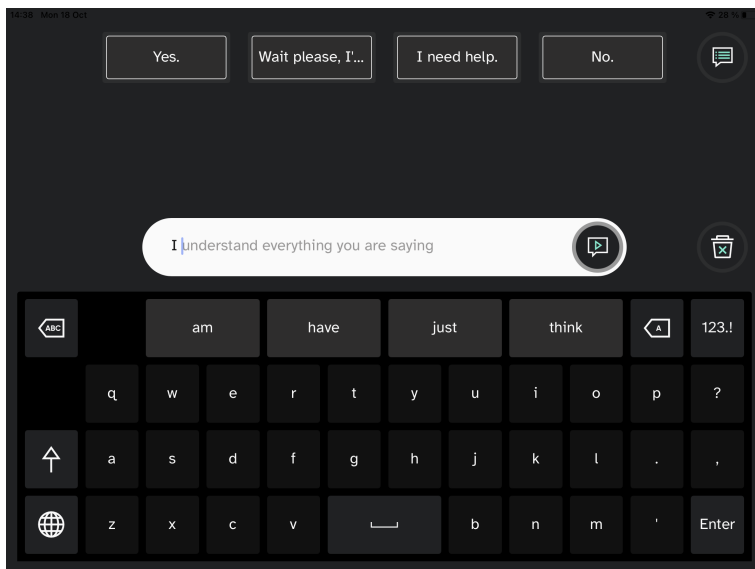


Välj den föreslagna frasen genom att fästa blicken på frasen. Färgen på frasen ändras från grått till svart för att visa att den har valts. Den kan nu läsas upp eller redigeras.

4.3 Redigera ett meddelande

4.3.1 Hur redigerar jag ett meddelande?

1. Titta på texten i meddelandefönstret. Redigeringsmenyn öppnas.

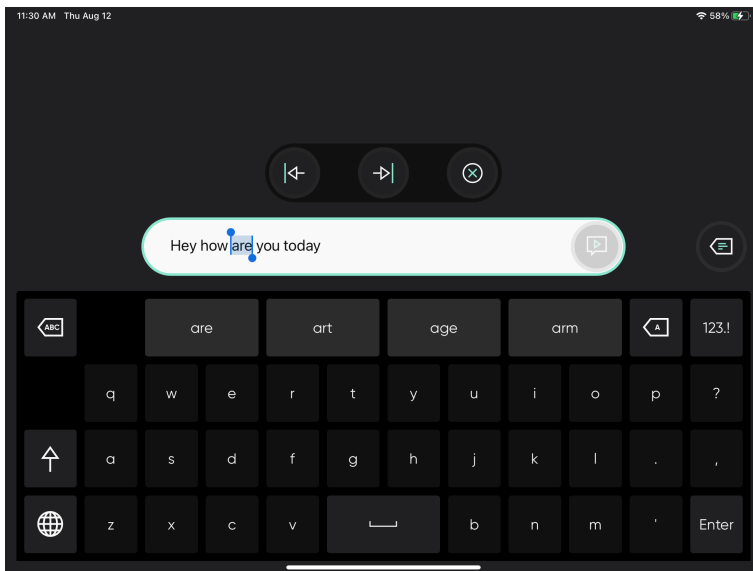

2. Använd pilarna  (Flytta till vänster) och  (Flytta till höger) för att navigera till den plats där du vill göra ändringen.
3. Använd tangentbordet eller ordprediktionen för att göra ändringen.
4. Välj knappen  (Stäng) för att lämna redigeringsläget.

4.4 Användning av Snabbmeddelanden

4.4.1 Hur använder jag Snabbmeddelanden TD Talk?

Det finns två (2) typer av snabbmeddelanden, de första är alltid synliga på startsideskärmen. De andra finns under knappen (Fler snabbmeddelanden).




Snabbmeddelanden på startsideskärmen

1. Välj **snabbmeddelandet** för att läsa upp.
Det valda meddelandet kommer att läsas upp omedelbart utan att läggas till i meddelandefönstret och utan att störa meddelanden som du håller på att bearbeta.

Fler snabbmeddelanden

1. Välj knappen  (Fler snabbmeddelanden).

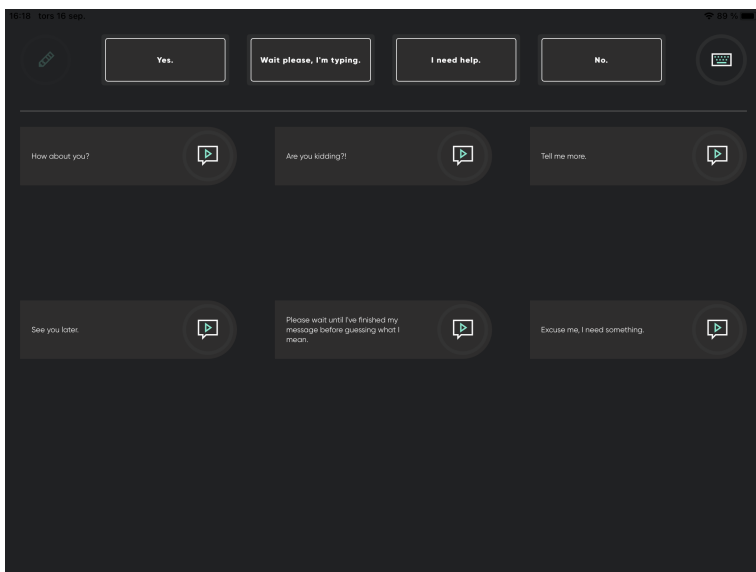

2. Välj knappen  (Läs upp) bredvid meddelandet.
3. Välj knappen  (Tangentbord) för att återgå till startsideskärmen.

4.4.2 Hur kan jag redigera snabbmeddelanden TD Talk?

1. Välj knappen  (Fler snabbmeddelanden).
2. Välj knappen  (Redigera).
3. Välj knappen  (Redigera) bredvid det meddelande som ska redigeras.
4. Gör ändringarna i meddelandet med hjälp av tangentbordet.
5. Välj knappen  (Spara) för att spara ändringarna i snabbmeddelandet.
6. Välj knappen  (Stäng) för att lämna redigeringsvyn.
7. Välj knappen  (Tangentbord) för att återgå till startsideskärmen.

4.4.3 Hur kan jag lägga till ett snabbmeddelande TD Talk?

1. Välj knappen  (Fler snabbmeddelanden).
2. Välj knappen  (Redigera).
3. Välj knappen  (Lägg till) bredvid Lägg till ny plats...
4. Skriv det nya meddelandet med hjälp av tangentbordet.

5. Välj knappen  (Spara) för att spara ändringarna i snabbmeddelandet.
6. Välj knappen  (Stäng) för att lämna redigeringsvyn.
7. Välj knappen  (Tangentbord) för att återgå till startsideskärmen.

4.4.4 Hur kan jag ta bort ett snabbmeddelande i TD Talk?


1. Välj knappen  (Fler snabbmeddelanden).
2. Välj knappen  (Redigera).
3. Välj knappen  (Redigera) bredvid det meddelande som ska tas bort.
4. Välj knappen  Ta bort meddelande.
5. Välj knappen  (Spara) för att spara ändringarna i snabbmeddelandet.
6. Välj knappen  (Stäng) för att lämna redigeringsvyn.
7. Välj knappen  (Tangentbord) för att återgå till startsideskärmen.

4.5 Ändra språk

4.5.1 Hur ändrar jag snabbt språket för uppläsning TD Talk?

1. Välj knappen (Språk)  på tangentbordet.
2. Välj det språk som ska läsas upp
Om det önskade språket saknas, se 5.2.3.1 *Hur lägger jag till/laddar ner ett nytt språk/tangentbordsspråk i TD Talk?*, sida 22
3. Välj knappen  (Tillbaka) för att gå tillbaka

5 Inställningar av TD Talk

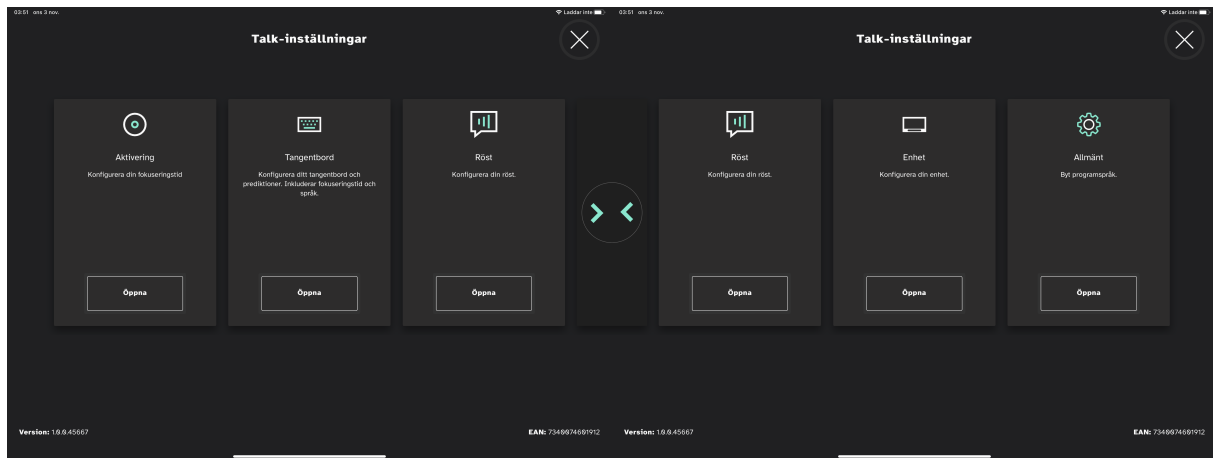


Ikoner	Åtgärd	Beskrivning
	Aktivering	Endast tillgänglig om en ögonstyrningsenhet är installerad och aktiverad. Öppnar inställningarna för Aktivering . Mer information finns i <i>5.1 Aktivering</i> , sida 18.
	Tangentbord	Öppnar inställningarna för Tangentbord . Mer information finns i <i>5.2 Tangentbord</i> , sida 20.
	Röst	Öppnar röstinställningarna . Mer information finns i <i>5.3 Röst</i> , sida 24.
	Enhet	Finns endast på TD Pilot. Öppnar inställningarna för Enheten . Mer information finns i <i>5.4 Enhet</i> , sida 26.
	Allmänt	Öppnar de Allmänna inställningarna,. Mer information finns i <i>5.5 Allmänt</i> , sida 28.

5.1 Aktivering



Endast tillgänglig om en ögonstyrningsenhet är installerad och aktiverad.

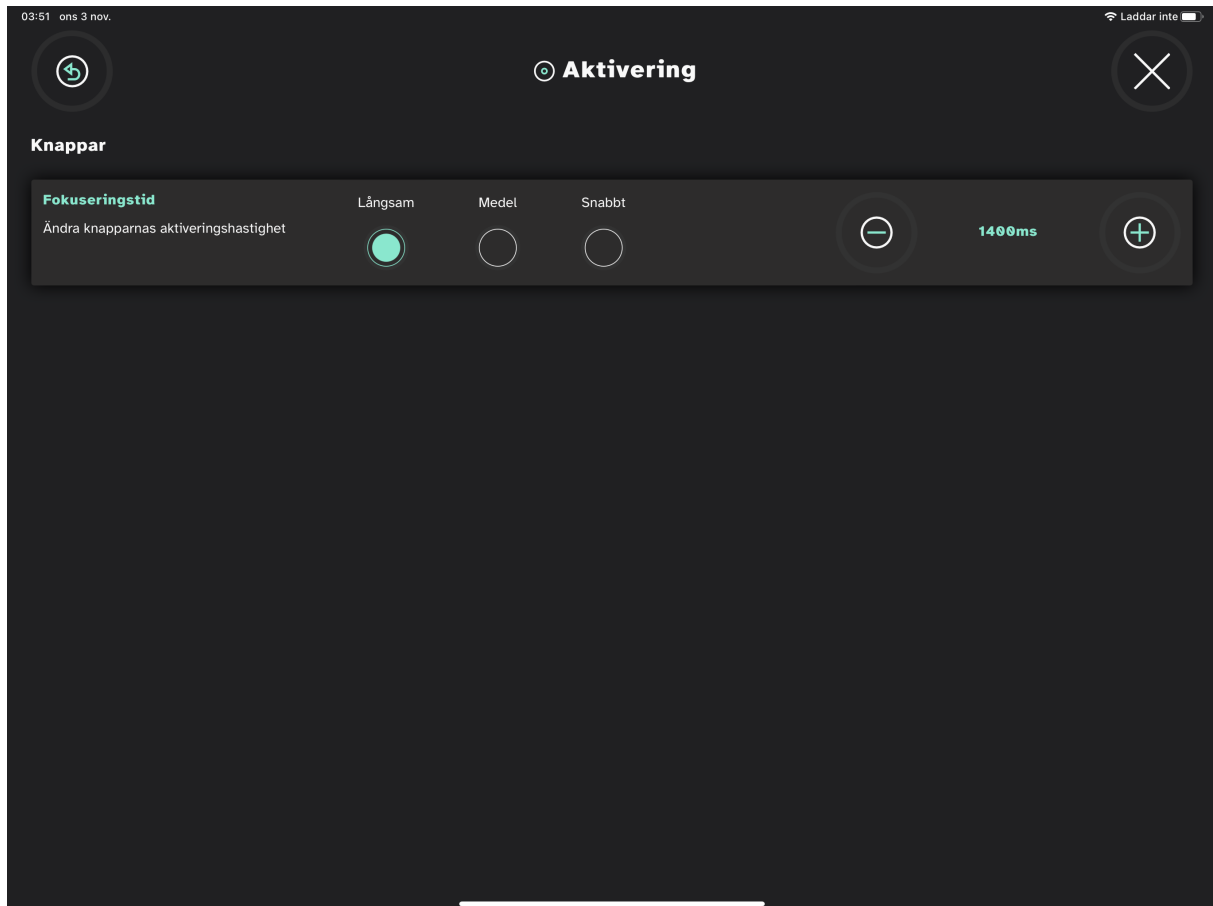

5.1.1 Knappar

5.1.1.1 Hur ändrar jag fokuseringstiden för aktivering av knappar i TD Talk?



Med knappar avses inte knapparna på tangentbordet utan de knappar som finns på alla andra ställen i TD Talk.

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Aktivering) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Knappar** .
7. Välj knappen för **fokuseringstid** för ett av de aktuella värdena:
 - Långsam
 - **Medium** (standard)
 - Snabbt

8. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.
9. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.1.1.2 Hur finjusterar jag tiden för aktivering av knappar i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.


2. Välj knappen  (Mer) för att öppna Mer.
3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.
4. Leta efter ikonen  (Aktivering) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen **Öppna** .
6. Titta i avsnittet **Knappar** .
7. Välj en av följande knappar för att finjustera **fokuseringstiden**:

-  - sänka fokuseringstiden.
-  - öka fokuseringstiden.

Värdet kan ändras mellan 200 ms - infinitiv

8. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.
9. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.2 Tangentbord

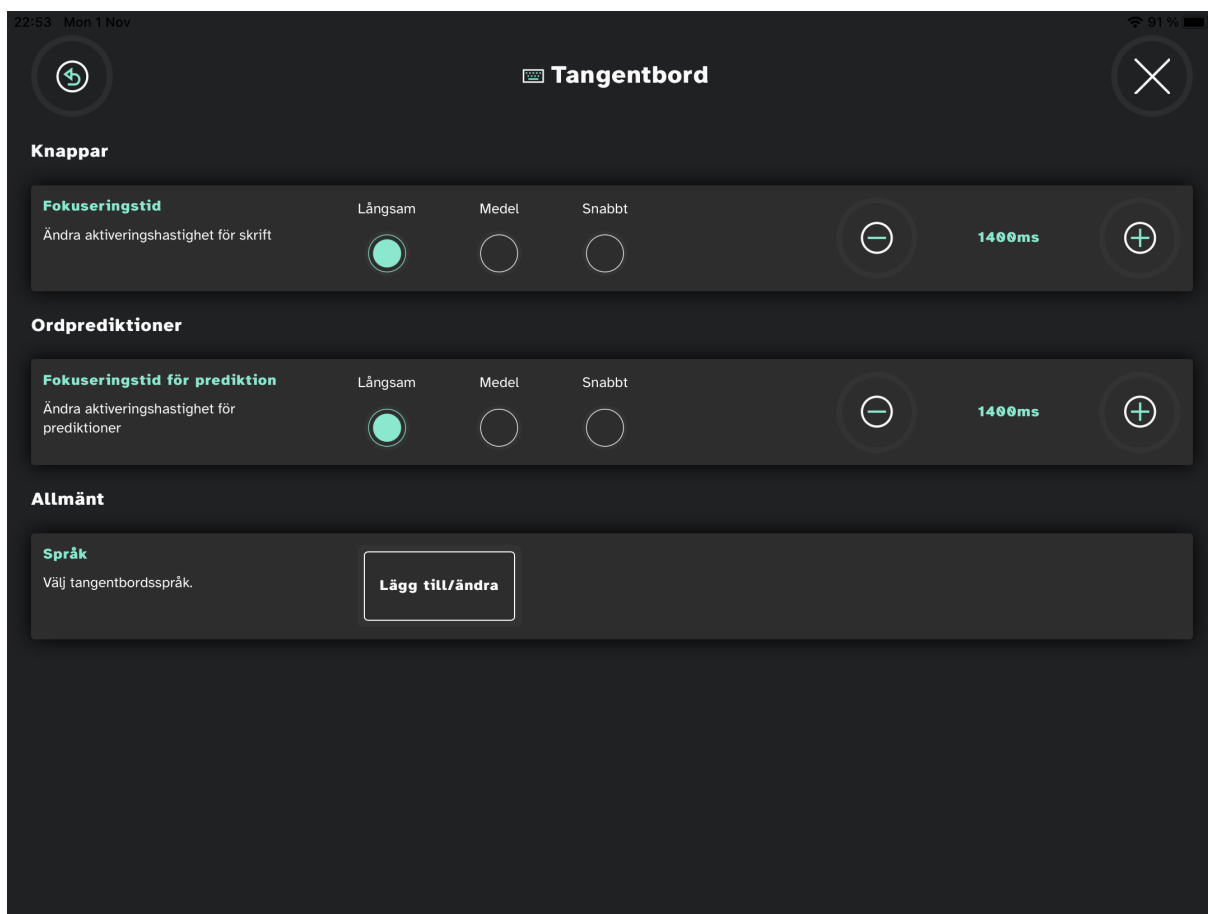

5.2.1 Knappar

5.2.1.1 Hur ändrar jag fokuseringstiden på tangentbordsknapparna i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Knappar**.

7. Välj knappen för **fokuseringstid** för ett av de aktuella värdena:

- Långsam
- **Medium** (standard)
- Snabbt

8. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.
9. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.2.1.2 Hur finjusterar jag tiden för aktivering av knappar i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Mer) för att öppna Mer.
3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.
4. Leta efter ikonen  (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen **Öppna**.
6. Titta i avsnittet **Knappar**.
7. Välj en av följande knappar för att finjustera **fokuseringstiden**:

-  - sänka fokuseringstiden
-  - öka fokuseringstiden

Värdet kan ändras mellan 200 ms - infinitiv

8. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.
9. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.2.2 Ordprediktion

5.2.2.1 Hur ändrar jag Dwell Time (uppehållstiden) för prediktionsknappar i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Mer) för att öppna Mer.
3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.
4. Leta efter ikonen  (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen **Öppna**.
6. Titta i avsnittet **Ordprediktion**.
7. Välj knappen för **fokuseringstid** för ett av de aktuella värdena:

- Långsam
- **Medium** (standard)
- Snabbt

8. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.

9. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.2.2.2 Hur finjusterar jag fokuseringstiden för prediktionsknappar i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Ordprediktion**.

7. Välj en av följande knappar för att finjustera **fokuseringstiden**:

-  - sänka fokuseringstiden

-  - öka fokuseringstiden

Värdet kan ändras mellan 200 ms - infinitiv

8. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.

9. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.2.3 Allmänt

5.2.3.1 Hur lägger jag till/laddar ner ett nytt språk/tangentbordsspråk i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Tangentbord) för att hitta rätt inställningar.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Allmänt**.

7. Välj knappen **Lägg till/ändra** "Välj tangentbordsspråk".

8. Välj fliken **Ladda ner**.

9. Välj knappen  (Ladda ner) bredvid språket för att starta nedladdningen av det nya tangentbordet.

10. Välj knappen **Ladda ner** för att påbörja nedladdningen eller knappen **Avbryt** för att avbryta nedladdningen.

11. Välj fliken **Installerad**.

12. Välj knappen bredvid språken för att aktivera språket.

13. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.

14. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.2.3.2 Hur väljer och aktiverar jag tangentbordsspråken som jag vill använda/vara tillgänglig för i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Tangentbord) för att hitta rätt inställningskort.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Välj knappen **Lägg till/ändra** "Välj tangentbordsspråk".

7. Välj fliken **Installerad**.

8. Välj knappen bredvid språken för att aktivera tangentbordsspråket för dessa språk.



Se till att du väljer knappen för alla de språk som du vill ha en röst tillgänglig för.


9. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.

10. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.3 Röst



Här ställs rösten in för det språk som ska läsas upp.

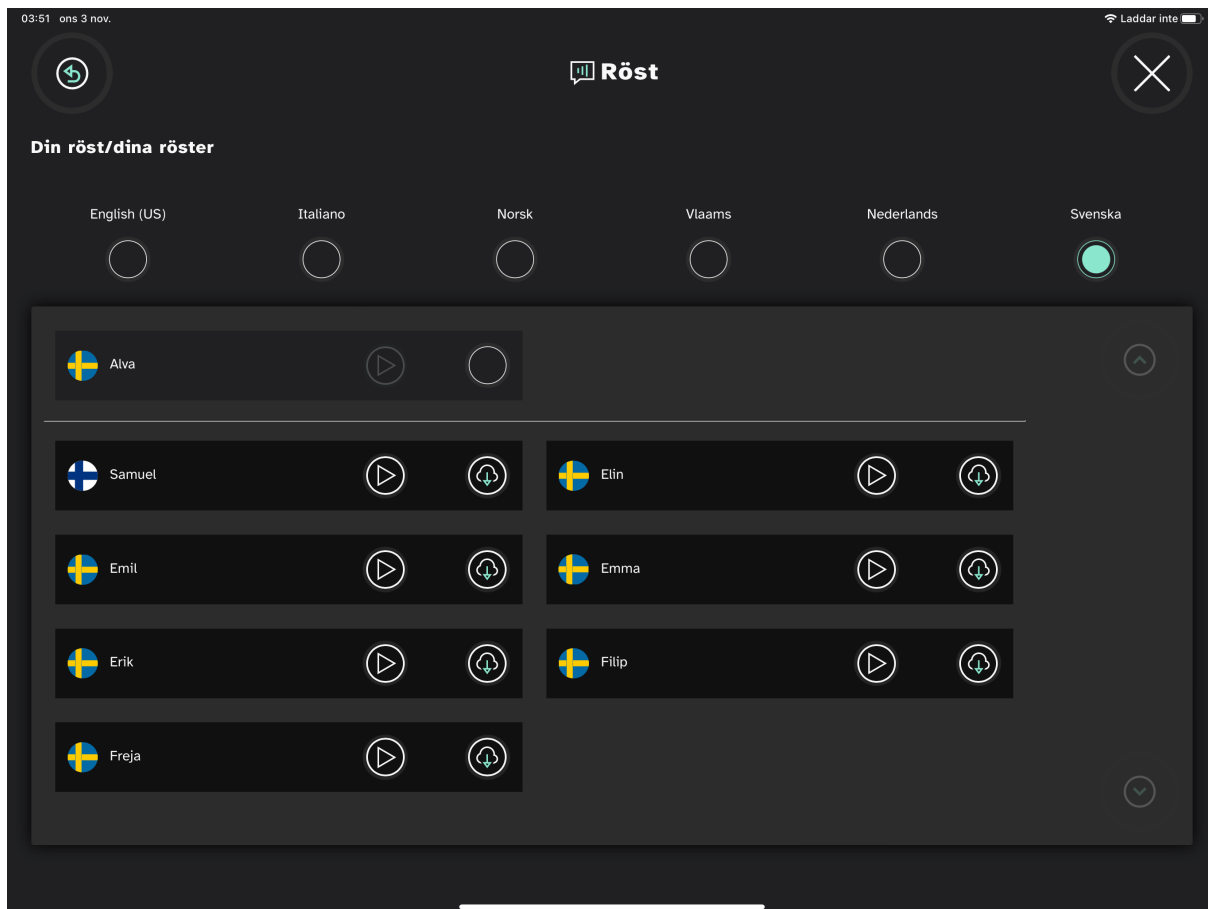

Alla installerade språk visas i den övre delen av skärmen. När språket har valts visas de tillgängliga rösterna för det språket i listan under språken. Om du vill prova en röst väljer du  bredvid rösten för att prova rösten. Om den finns tillgänglig.

5.3.1 Hur väljer jag min röst i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter (röst) ikonen  för att hitta rätt inställningar.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Din röst/dina röster**.

7. Välj knappen under det installerade språket som du vill läsa upp.



Om det önskade språket saknas, se 5.2.3.1 *Hur lägger jag till/laddar ner ett nytt språk/tangentbordsspråk i TD Talk?*, sida 22 och 5.2.3.2 *Hur väljer och aktiverar jag tangentbordsspråken som jag vill använda/ vara tillgänglig för i TD Talk?*, sida 23.

- Välj den röst som ska användas i listan över tillgängliga röster för det språk som ska läsas upp. Använd knapparna "Scroll up" och "Scroll down" till höger för att bläddra genom listan över tillgängliga röster för språket.



Om du vill prova en röst väljer du  bredvid rösten.

- Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.
- Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.3.2 Hur laddar jag ner en ny röst i TD Talk?

- Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

- Välj knappen  (Mer) för att öppna Mer.
- Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.
- Leta efter (röst) ikonen  för att hitta rätt inställningskort.
- Välj knappen **Öppna**.
- Titta i avsnittet **Din röst/dina röster**.
- Välj radioknappen under det installerade språket som du vill läsa upp.



Om det önskade språket saknas, se 5.2.3.1 *Hur lägger jag till/laddar ner ett nytt språk/tangentbordsspråk i TD Talk?*, sida 22 och 5.2.3.2 *Hur väljer och aktiverar jag tangentbordsspråken som jag vill använda/ vara tillgänglig för i TD Talk?*, sida 23.

- Välj knappen  (Ladda ner) bredvid språket för att starta nedladdningen av det nya tangentbordet. Använd knapparna "Scroll up" och "Scroll down" till höger för att bläddra genom listan över tillgängliga röster för språket.




Om du vill prova en röst väljer du  bredvid rösten.

- Välj knappen **Ladda ner** för att påbörja nedladdningen eller knappen **Avbryt** för att avbryta nedladdningen.
- Välj den röst som ska användas i listan över tillgängliga röster för det språk som ska läsas upp.
- Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.
- Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.4 Enhet



Finns endast på TD Pilot.

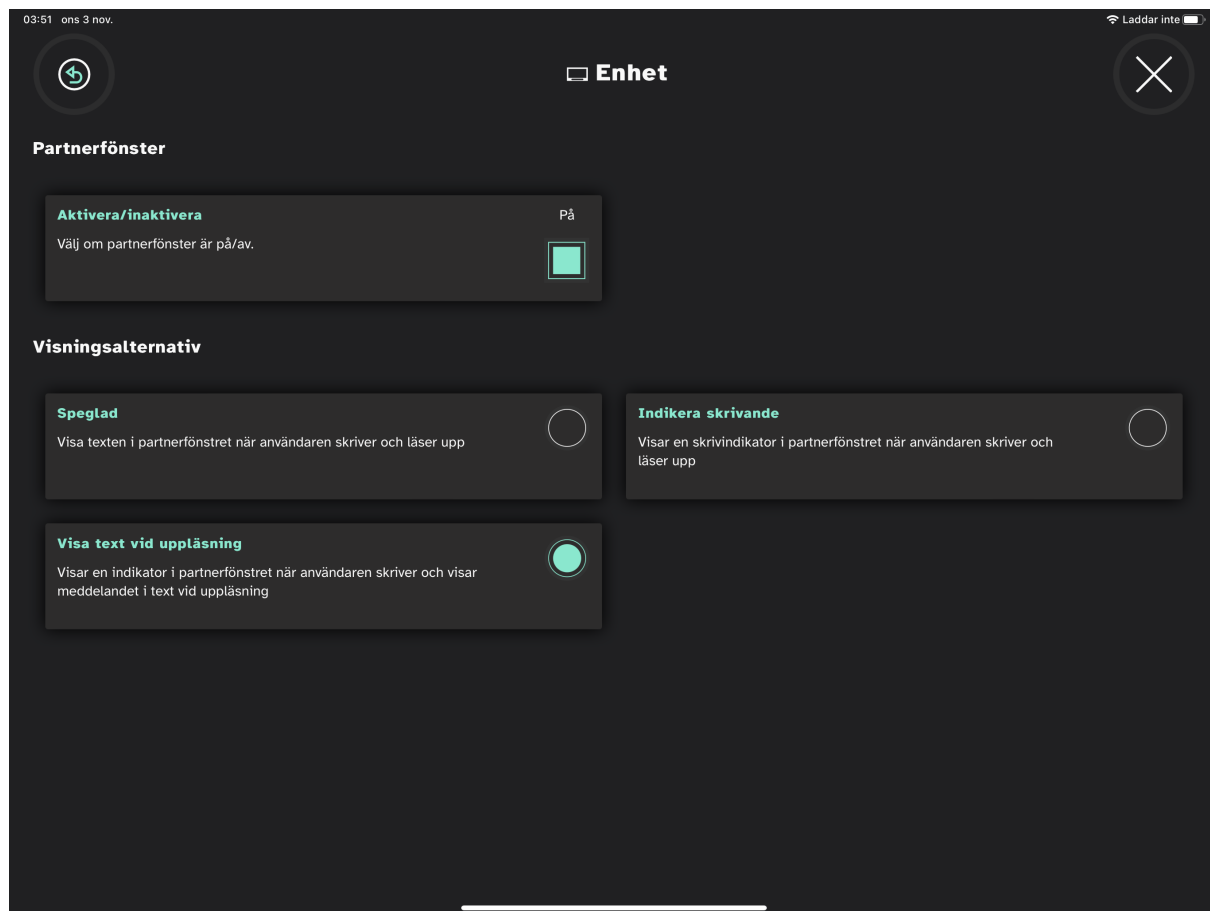

5.4.1 Partnerfönster

5.4.1.1 Hur aktiverar/avaktiverar jag partnerfönstret i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Leta efter ikonen  (Enhet) för att hitta rätt inställningar.

5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Partnerfönstret**.

7. Växla knappen **Aktivera/Inaktivera** för "Välj om partnerfönstret är på/av" till:

- På
- Av

8. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.
9. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.4.1.2 Hur ställer jag in visningsalternativen för partnerfönstret i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Mer) för att öppna Mer.
3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.


4. Leta efter ikonen  (Enhet) för att hitta rätt inställningskort.
5. Välj knappen **Öppna**.

6. Titta i avsnittet **Visningsalternativ**.
7. Klicka på en av de följande knapparna för att välja visningsalternativet för partnerfönstret:

- Speglad - Visar texten i partnerfönstret medan du skriver och läser upp.
- Visa text när du läser upp - Visar en indikator i partnerfönstret när du skriver och visar meddelandet i text när du läser upp.
- Indikera skrivande - Visar en skrivindikator i partnerfönstret när användaren skriver och läser upp.

8. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.
9. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

5.5 Allmänt

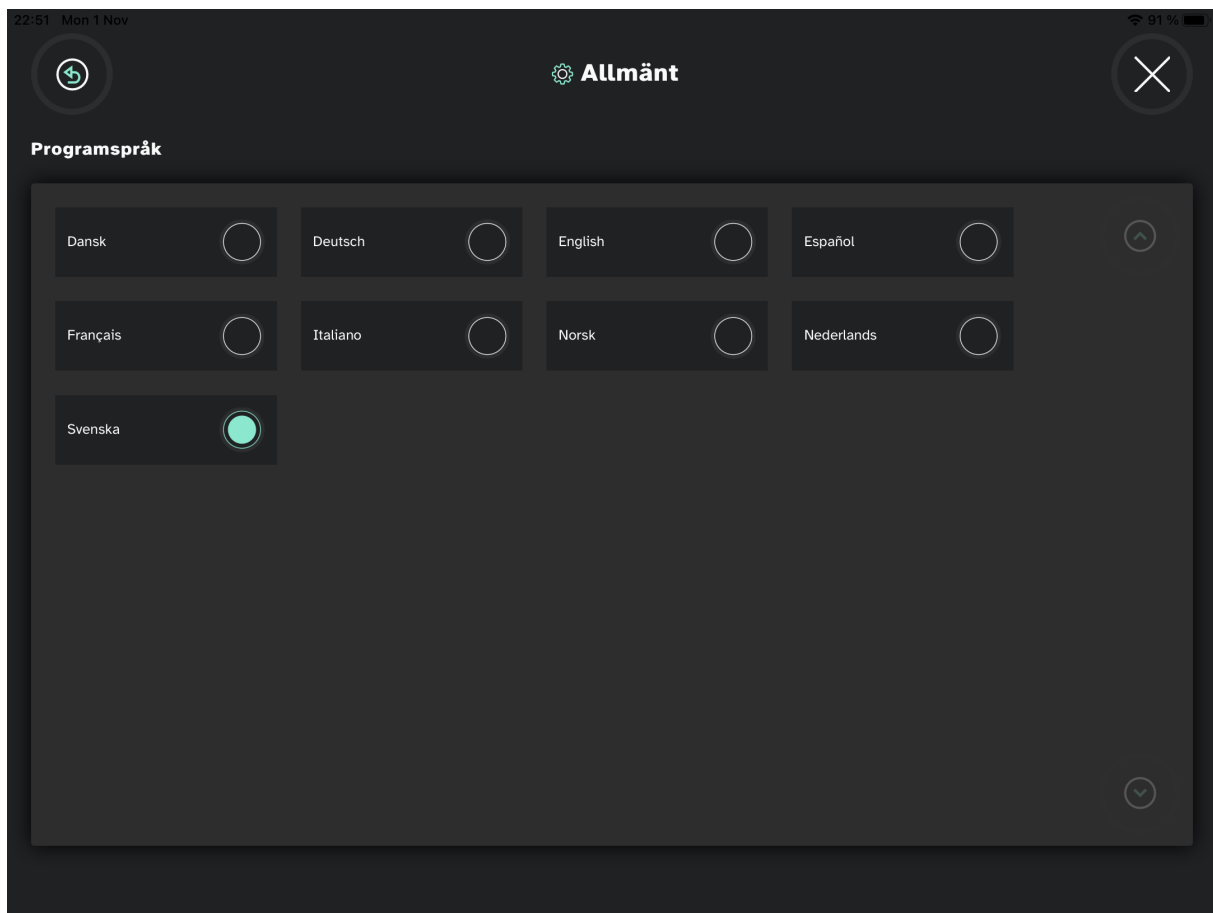

5.5.1 Hur ställer jag in mitt programspråk i TD Talk?

1. Fokusera blicken under skärmen, i mitten av ögonstyrningsenheten eller på ögonstyrningsenhetens yta.

Knappen  (Mer) blir synlig nere i mitten av skärmen.

2. Välj knappen  (Mer) för att öppna Mer.

3. Välj åtgärden  (Inställningar) för att öppna TD Talk -inställningar.

4. Välj knappen  (Nästa skärm) på höger sida.

5. Leta efter ikonen  (Allmänt) för att hitta rätt inställningskort.

6. Välj knappen **Öppna**.

7. Titta i avsnittet **Programspråk**.

8. Välj knappen bredvid det språk du vill att programmet ska vara på.

9. Välj knappen  (Tillbaka) för att återgå till TD Talk -inställningar.

10. Välj knappen  (Stäng) för att avsluta TD Talk -inställningar.

Copyright ©Tobii Dynavox AB. Alla produkter och tjänster erbjuds inte på alla lokala marknader. Specifikationerna kan komma att ändras utan förvarning. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Support för din Tobii Dynavox-enhet

Få hjälp online

Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii Dynavox-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten. Hitta våra supportsidor online på: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakta din lösningskonsult eller återförsäljare

Kontakta din lösningskonsult på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst lämpade att hjälpa dig med tips och övning. För kontaktuppgifter, se www.TobiiDynavox.com/contact