

Tobii Dynavox Windows Control

Felhasználói kézikönyv

Tartalmazza a következőt: Virtual Remote 



Felhasználói kézikönyv Tobii Dynavox Windows Control

Verzió 1.3

01/2019

Minden jog fenntartva.

Copyright © Tobii AB (publ)

Jelen dokumentum sem egészében, sem részben nem sokszorosítható, nem tárolható lekérdezhető rendszerekben és nem vihető át semmilyen formában, semmilyen (elektronikus, fénymásoló, adatrögzítő, vagy egyéb) eszközzel, a kiadó írásban kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül.

A szerzői jog védelmére irányuló igény kiterjed a szerzői jog tárgyát képező tartalom és információ minden formájára és anyagára, melyet alapszabály vagy jogszabály, illetve a jelen dokumentum alább biztosít, ideértve, korlátozás nélkül, a képernyőn megjelenő szoftverek által származtatott tartalmat, így képernyőkép tartalmat, menüket, stb.

A jelen dokumentumban tartalmazott információk a Tobii Dynavox tulajdonát képezik. Bármely egészben, vagy részben történő sokszorosítás a Tobii Dynavox írásban adott előzetes hozzájárulása nélkül tilos.

A jelen dokumentumban hivatkozott termékek tulajdonosaik kereskedelmi védjegye és/vagy bejegyzett kereskedelmi védjegye alatt állhatnak. A kiadó és a szerző igénye nem terjed ki ezekre a kereskedelmi védjegyekre.

Noha minden elővigyázatossági lépést megtettünk e dokumentum elkészítésekor, a kiadó és a szerző nem vállal felelősséget azokért a hibákért, hiányosságokért, illetve károkért, amelyek a dokumentumban tartalmazott, illetve az ezt kísérő programok és forráskódok adatainak használatára vezethetők vissza. A kiadó és a szerző semmi esetre sem vonható felelősségre bármely nyereség elmaradásáért, illetve egyéb káreseményért vagy állítólagos káreseményért, melyet ez a dokumentum közvetve vagy közvetlenül okozott.

A tartalom előzetes bejelentés nélküli módosításának joga fenntartva.

Kérjük, keresse a Tobii Dynavox honlapon

www.TobiiDynavox.com e dokumentum frissített változatát.

Kapcsolattartási adatok:

Tobii Dynavox	Tobii Dynavox LLC
Karlsrovägen 2D	2100 Wharton Street, Suite
182 53 Danderyd	400
Svédország	Pittsburgh, PA 15203
+46 8 663 69 90	Amerikai Egyesült Államok
	+1-800-344-1778

Tartalom

1	Névjegy Tobii Dynavox Windows Control	5
1.1	Rendeltetésszerű használat	5
1.2	Rendszerekvetelmények	5
2	Telepítés, indítás és a licenc kezelése.....	6
2.1	Telepítés Tobii Dynavox Windows Control	6
2.2	A licenc kezelése.....	6
2.2.1	A licenc aktiválása	6
2.2.1.1	Online aktiválás.....	6
2.2.1.2	Offline aktiválás.....	7
2.2.2	A licenc inaktiválása.....	8
2.3	Első indítás.....	9
3	A Tobii Dynavox Windows Control használata	10
3.1	A Windows Control vezérlő	10
3.2	Követési Állapot	11
3.3	A Windows Control Feladatsáv	12
3.3.1	A Windows Control Feladatsáv módjai.....	12
3.4	Szokásos Feladatok.....	13
3.4.1	A Szokásos Feladat Megnyilvánulás a különböző módokban	14
3.5	Rögzített Feladatok.....	15
3.5.1	A Rögzített Feladat Megnyilvánulás a különböző módokban	15
3.6	Biztonságos Kattintás	16
3.7	Parancsikonok	17
3.8	Kiválasztási módszer — Tekintet vagy Kapcsoló.....	19
3.8.1	Aktív alapértelmezetten Tekintet és Kapcsoló módszerrel.....	19
3.8.2	Feladat aktiválása Billentyűzettel Kapcsoló helyett	20
3.9	Tekintet billentyűzet	20
3.9.1	Billentyűzet Feladatsáv.....	21
3.9.2	Feladat gombok a Billentyűzet Feladatsávhoz.....	22
3.9.3	Szó előrejelzés.....	22
3.10	Windows Control Régió Alapú Alkalmazásokkal kombináltan	23
3.11	Eye Detection Indicator	23
4	Windows Control Beállítások	24
4.1	Szemkövető	25
4.1.1	A Kalibrálás fül	25
4.1.1.1	Profilok kezelése	25
4.1.1.2	Új profil létrehozása	26
4.1.1.3	Kalibrálási Eredmények	26
4.1.1.4	Próbakalibrálás	27
4.1.1.5	Újrakalibrálás	27
4.1.1.6	A kalibrálás típusa	28
4.1.2	A Speciális fül.....	30
4.1.2.1	Kijelző konfigurálása	30
4.2	Általános Beállítások	31
4.2.1	Az Általános fül	31
4.2.2	A Névjegy fül	31
4.2.2.1	Licenc kód.....	32

4.3	Segítség és Használat	32
4.3.1	A Segítség fül	32
4.3.2	A Használat fül	33
4.4	Aktiválás és visszajelzés	33
4.4.1	Az Aktiválás fül	33
4.4.1.1	Tekintet beállítások	33
4.4.1.2	Tekintet és Kapcsoló beállítások	34
4.4.2	A Visszajelzés fül	35
4.5	Feladatsáv	36
4.5.1	A Feladatsáv fül	36
4.5.1.1	Feladatok	36
4.5.1.2	Bal kattintás nagy méretűvé tétele	36
4.5.1.3	Automatikus elrejtés	37
4.5.1.4	Követési állapot	37
4.5.1.5	Feladatsáv mérete	37
4.5.2	A Kiválasztás Fül	38
4.5.2.1	Elsődleges kiválasztás	38
4.5.2.2	Másodlagos kiválasztás	38
4.5.2.3	Harmadlagos kiválasztás	38
4.5.3	A Nagyítás fül	38
4.6	Billentyűzet	39
5	Virtual Remote	41
5.1	A Virtual Remote áttekintése	41
5.1.1	Virtual Remote menü	41
5.1.2	Az Aktív távirányító	42
5.1.3	A gombok	42
5.2	A Tobii Dynavox Virtual Remote használata	43
5.2.1	Első indításkor	44
5.2.2	Másik aktív távirányító kiválasztása	44
5.2.3	A távirányító gombjainak használata	44
5.2.4	Távirányító hozzáadása	44
5.2.4.1	Előre programozott távirányító hozzáadása	45
5.2.4.2	Programozatlan távirányító hozzáadása	49
5.2.5	Szerkesztés mód	51
5.2.5.1	Távirányító nevének módosítása	52
5.2.5.2	Távirányító törlése	53
5.2.5.3	Módosítások létező aktív gombon	54
5.2.5.4	Módosítások létező nem programozott gombon	57
5.2.5.5	Új gomb hozzáadása üres helyre	59
5.2.6	Információk	60

1 Névjegy Tobii Dynavox Windows Control

1.1 Rendeltetésszerű használat

Vezérelje számítógépét kizárólag szemeivel, illetve szeme és kapcsoló segítségével. Emulálhat bármely típusú egérmozgást, pásztaási tevékenységet és akár szöveget is begépelhet díjnyertes szoftverünkkel. Intelligens billentyűparancsokat adtunk hozzá, hogy még könnyebben használhassa a Windows minden részét!

1.2 Rendszerkövetelmények

Komponens	Követelmények
Számítógép és processzor	2.0 gigahertz (GHz) vagy gyorsabb, Dual-Core processzor (ajánlott minimális konfiguráció).
Memória (RAM)	4 gigabyte (GB) RAM (ajánlott minimális érték).
Merevlemez	450 megabájt (MB), rendelkezésre álló,
USB	USB 2.0
Operációs rendszer	Az alábbiak 4 bites verziói: • Windows 7 • Windows 8,1 • Windows 10
.NET verzió	4.5
Szemkövető	A Tobii Dynavox vagy Tobii Tech bármely szemkövetője, amely támogatja a Tobii szemkövető alapszoftvert.
További követelmények és szempontok	A licenc aktiválásához internetkapcsolat szükséges.
Tobii szemkövető alapszoftver	2.8 vagy frissebb verzió,
Infravörös távirányító	Bármely készülék, amely fel van szerelve HBR IR csippel, például: Tobii Dynavox EyeR, Indi, I-Series, I-110 vagy EyeMobile Plus.

2 Telepítés, indítás és a licenc kezelése

2.1 Telepítés Tobii Dynavox Windows Control



Ha már telepítve van, akkor a Tobii Gaze Interaction szoftvert telepítés előtt el kell távolítani Windows Control.

Windows Control Innen tölthető le www.TobiiDynavox.com.

A telepítő varázsló a következő alkalmazásokat telepíti:

- Tobii Dynavox Windows Control
- Tobii Dynavox Virtual Remote

A Windows Control telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2.2 A licenc kezelése


2.2.1 A licenc aktiválása



A Windows Control egyszerre három (3) számítógépen/eszközön futtatható ugyanazzal a licenccel. Ahhoz, hogy a Windows Control több mint három (3) számítógépen/eszközön legyen használható, a Windows Control szoftvert először inaktíválni kell a többi számítógép/eszköz egyikén (1).

Amikor a Windows Control szoftvert megvásárolja, kap egy Licence Activation Key kulcsot a szoftverhez a megrendelést visszaigazoló e-mail révén.

Amikor a Windows Control első alkalommal fut a **License Manager** elindul.

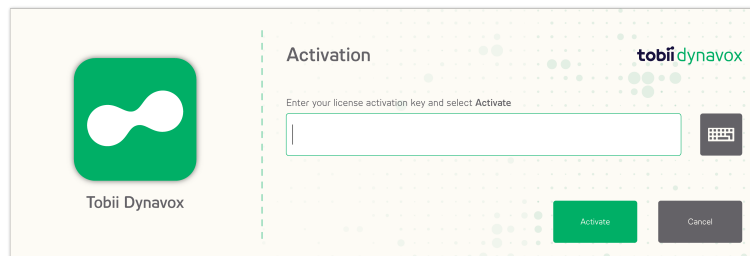

A Licenc párbeszédpanelben az éppen kezelt licenc tényleges szoftverikonja jelenik meg.


A **License Activation Key** a Rendelés visszaigazolása e-mailben található.

2.2.1.1 Online aktiválás

Internetkapcsolattal rendelkező számítógép/eszköz számára.

1. Győződjön meg, hogy a számítógépnek/eszköznek van internetkapcsolata.
2. Gépelje be a **License activation key**.

3. Válassza az **Aktiválás** gombot.

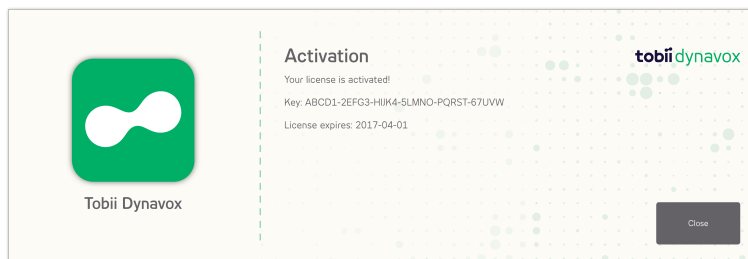


A Licenc párbeszédpanelben az éppen kezelt licenc tényleges szoftverikonja jelenik meg.

4. Válassza a **Bezárás** gombot.


2.2.1.2 Offline aktiválás


Internetkapcsolattal nem rendelkező számítógép/eszköz számára.


1. Gépelje be a **License activation key**.
2. Válassza az **Aktiválás** gombot.

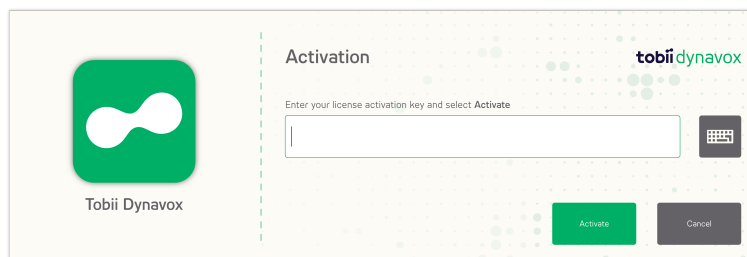

3. Válassza az  (információk) ikont.

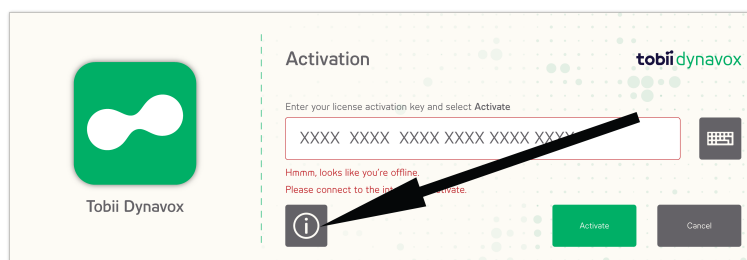

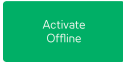
4. Válassza az  (Offline aktiválás) gombot.

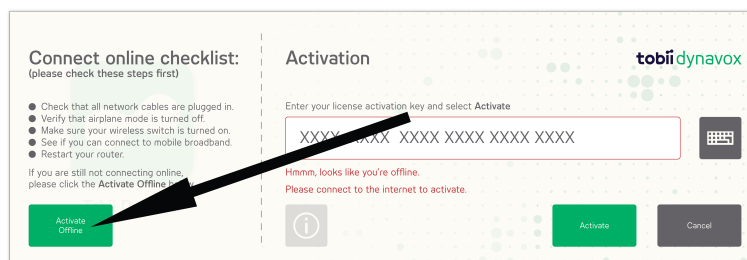


5. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Internetkapcsolattal rendelkező eszközön, kattintson rá: <https://www.tobiidynavox.com/activation-key/> és kövesse az online utasításokat.

- Vegye fel a kapcsolatot a Tobii Dynavox ügyfélszolgálatával vagy a helyi viszonteladójával.


Szüksége lesz az ebben a párbeszédablakban látható számítógép nevére:

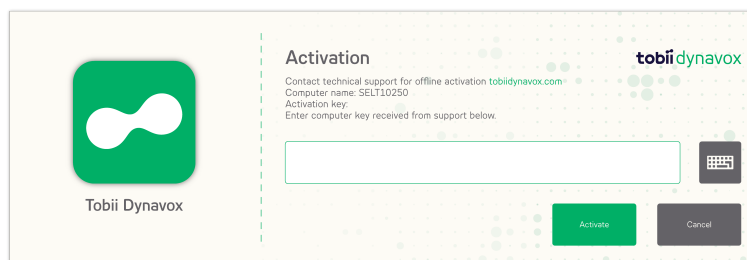

6. Gépelje be a fenti lehetőség egyike szerint megadott **aktiválási kódot**.

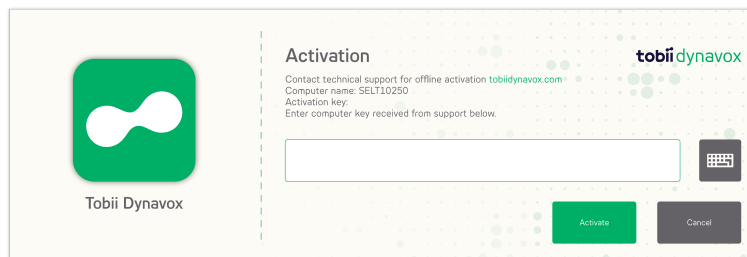

7. Válassza az **Aktiválás** gombot.

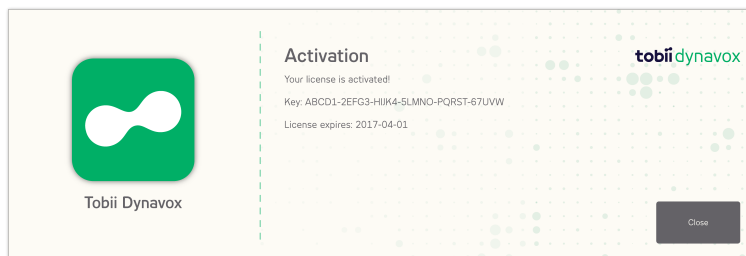

8. Válassza a **Bezárás** gombot.

2.2.2 A licenc inaktíválása

A Windows Control inaktíválásához ezekkel a lépésekkel folytassa.

1. Győződjön meg, hogy a számítógépnek/eszköznek van internetkapcsolata.
2. Indítsa a Windows Control szoftvert.
3. Válassza a  (BEÁLLÍTÁSOK) gombot.
4. Válassza az  (Általános beállítások) gombot.
5. Válassza a **Névjegy** fület.
6. Válassza a **Licenc kód** gombot.

7. Válassza az **Inaktíválás** gombot.



A Licenc párbeszédpanelben az éppen kezelt licenc tényleges szoftverikonja jelenik meg.

8. Az alábbiak közül választhat:

- **Igen** — a licenc inaktíválásához ezen az eszközön.
- **Nem** — a visszavonáshoz.

2.3 Első indítás

A Windows Control első indításakor a felhasználó egy konfigurálási útmutató segítségével megadhatja a Windows Control indítási beállításait. Az útmutató lépései: Az útmutató lépései:

- A képernyő konfigurálása. További információk tekintetében, lásd *4.1.2.1 Kijelző konfigurálása, oldal 30.*
- Új profil létrehozása. További információk tekintetében, lásd *4.1.1.2 Új profil létrehozása.*
- Próbakalibrálás, további információk tekintetében, lásd *4.1.1.4 Próbakalibrálás*

3 A Tobii Dynavox Windows Control használata


Tobii Dynavox Windows Control lehetővé teszi a felhasználó számára a standard Windows asztali operációs rendszer vezérlését kétlépéses kiválasztási módszer segítségével, mely a nemkívánatos kattintások kockázatát csökkenti. Ugyanakkor megelőzi, hogy az egérmutatót tekintetével kövesse, ahelyett, hogy vezérelje (a nem rendelkezik lebegő egérkurzorral Windows Control).

1. Az első lépésben válassza ki az óhajtott Feladat opciót a kitűzött Feladatsávban úgy, hogy rátekin.
2. A második lépésben tekintsen a képernyő óhajtott részére (vagy ikonra a képernyőn), ahol a Feladatot végre óhajtja hajtani. Az automatikus nagyítás funkció aktiválódik és befejeződik az ikon kiválasztása, illetve a feladat végrehajtása.



A Windows Control összes funkciója érintéssel és egérrel is aktiválható, ami megkönnyíti, hogy a gondozó vagy az asszisztens szükség esetén segítsen a felhasználónak. A Gondozó vagy az Asszisztens Funkciót / Feladatot választhat ki, vagy módosíthatja a beállításokat, hogy a felhasználónak könnyebb dolga legyen.

3.1 A Windows Control vezérlő

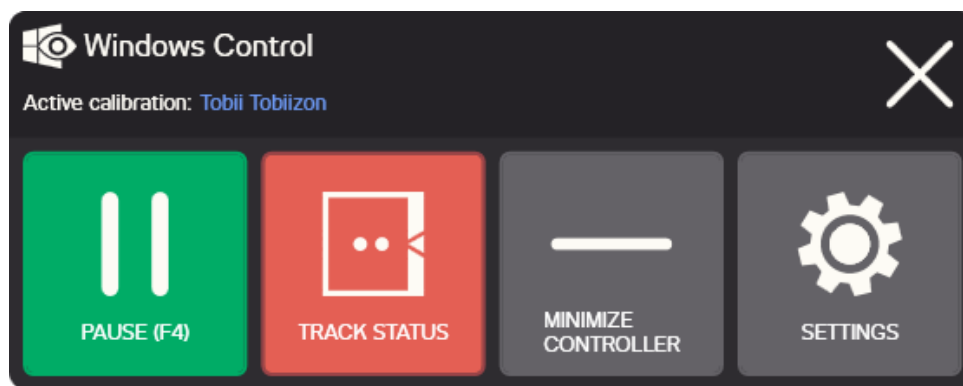


Ábra 3.1 A Windows Control vezérlő

Gomb	Művelet	Leírás
	SZÜNETELÉS (F4)	Művelet, mely szünetelteti a Windows Control vezérlőt. A Szünetelés funkció aktiválása révén átválthatja a gombot arra, hogy ehelyett az Indítás gombot mutassa. Az F4 billentyűt a billentyűzetten a feladat aktiválására használhatja.
	INDÍTÁS (F4)	Művelet, mely indítja a Windows Control vezérlőt. Az Indítás funkció aktiválása révén átválthatja a gombot arra, hogy ehelyett a Szünetelés gombot mutassa. Az F4 billentyűt a billentyűzetten a feladat aktiválására használhatja.
	KÖVETÉSI ÁLLAPOT	Művelet, mely a Követési Állapot ablakot jeleníti meg. Használja ezt annak ellenőrzéséhez, hogy a felhasználó helyes pozícióban ül a képernyő előtt. További információk tekintetében, lásd 3.2 Követési Állapot, oldal 11
	VEZÉRLŐ MINIMALIZÁLÁSA	Művelet, mely minimalizálja a vezérlő ablakot.

Gomb	Művelet	Leírás
	BEÁLLÍTÁSOK	Művelet, mely nyitja a Windows Control Beállítások menüjét. További információk tekintetében, lásd 4 <i>Windows Control Beállítások, oldal 24.</i>
	Bezárás	Művelet, mely bezárja a Windows Control vezérlőt.

3.2 Követési Állapot

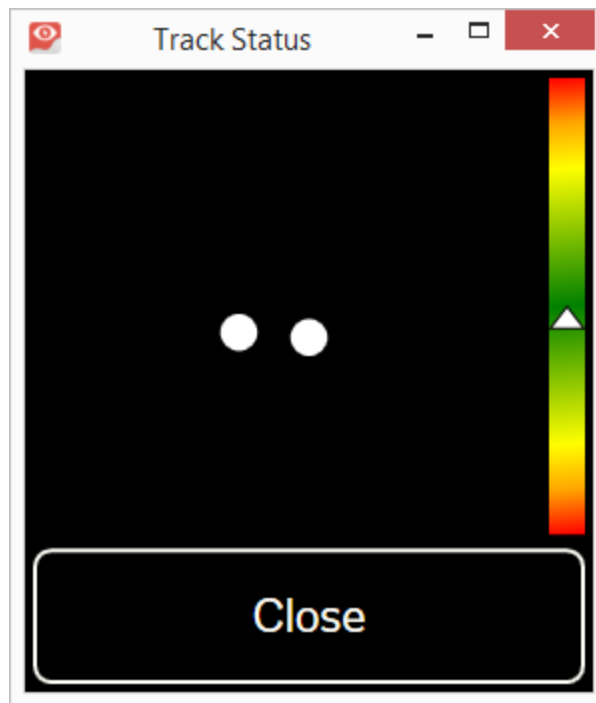

A **Követési Állapot** funkciót használja annak ellenőrzéséhez, hogy a felhasználó helyes pozícióban ül a szemkövető előtt.

- A két (2) fehér pont — A felhasználó szeme és hogyan helyezkednek el a képernyőhöz képest. Optimális elhelyezkedéshez a fehér pontoknak a fekete terület közepén kell lenniük.
- A színes teljes sáv bal oldalon fehér nyíllal — Milyen távol vagy közel helyezkedik el a felhasználó a képernyőhöz lépest.
 - Ha a fehér nyíl a sáv zöld részének közepén található, akkor a felhasználó optimális távolságra van a képernyőhöz képest.
 - Ha a nyíl a sáv alsó részénél található — hozza a felhasználót közelebb.
 - Ha a nyíl a sáv felső részénél található — vigye a felhasználót a sávól távolabb.

1. Nyissa meg a Windows Control vezérlőt.

2. Válassza a  (Követési Állapot) gombot.
3. Pozicionálja a felhasználót.
4. Válassza a **Bezárás** gombot, amint végez.



Ez a gomb szemzóna alapú, tehát csak rá kell tekintenie a gombra ennek aktiválásához.

3.3 A Windows Control Feladatsáv

A Windows Control Feladatsáv felső részén Követési Állapot nézet van. Lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a szemkövető felismeri-e szemét és azok jól helyezkednek-e el a készülék előtt.

A Feladat gombok a Windows Control Feladatsávban három különböző módon lehetnek, lásd *Ábra 3.2 A Windows Control Feladatsáv módjai*, oldal 13.



A Feladatsáv az F2 billentyűvel  jeleníthető meg/rejthető el normál billentyűzetten (nem a Windows Control billentyűzetten).

3.3.1 A Windows Control Feladatsáv módjai



A három különböző mód a Szokásos Feladatok, lásd 3.4 *Szokásos Feladatok*, és a Rögzített Feladatok, lásd 3.5 *Rögzített Feladatok* esetében egyaránt érvényes.



A Biztonságos Kattintás Feladatok gombnak nincs Másodlagos kiválasztás módja.

- **Normál (Nincs kijelölve)** - - Nincs Feladat Gomb a Windows Control számára van kiválasztva.
- **Elsődleges kiválasztás (fehér)** - A jelölt Feladat gomb ki van választva és a Feladat végrehajtása automatikusan megy végbe az automatikus nagyítás után amikor a felhasználó az óhajtott pozícióban tekint a képernyőn vagy ikonon rá. Ha a kiválasztási módszer Kapcsoló lehetőségre van állítva a Windows Control Beállítások párbeszédpanelben, a kiválasztott Feladat gomb még mindig aktív marad a Feladat végrehajtása után..
- **Másodlagos kiválasztás (kék / fehér)** - azonos, mint az **Elsődleges kiválasztás** de nagyobb pontossággal.. **Másodlagos kiválasztás** azt jelenti, hogy a nagyítás mélyebbre ható a Feladat végső kivitelezése előtt, s így a képernyő óhajtott része nagyobb és könnyebb kiválasztani benne. Aktiválja ezt a módot úgy, hogy tartsa tekintetét a Feladat gombon mindaddig, míg a szín az alábbi kép szerint át nem vált.




A Parancsikok és Beállítások feladatokra nem érvényes.

- **Harmadlagos kiválasztás (előugró menü)** — Bizonyos feladatokhoz a Feladatsávban előugró menü tartozik a megfelelő Rögzített Feladatok gombhoz, lásd 3.5 *Rögzített Feladatok*, oldal 15 és Biztonságos Kattintás Feladatok 3.6 *Biztonságos Kattintás*, oldal 16. Lépjen be a Rögzített vagy Biztonságos Kattintás feladat menübe, a Feladatgombon tartva a tekintetét mindaddig, míg az előugró menü a *Ábra 3.2 A Windows Control Feladatsáv módjai*, oldal 13 szerint át nem vált, és válassza ki a Rögzített vagy Biztonságos Kattintás feladatot, hogy a Feladatsávban a Szokásos feladatot Rögzített vagy Biztonságos Kattintás feladatra cserélje. A Rögzített vagy Biztonságos Kattintás feladat a Feladatsávon marad, és a Szokásos feladat a Harmadlagos kiválasztáson található meg. Ismételje meg az eljárást, hogy a Feladatsávon a Rögzített vagy Biztonságos Kattintás feladatot Szokásos feladatra cserélje.



A Parancsikok és Beállítások feladatokra nem érvényes.


A felhasználó által használandó módok beállításához kattintson rá: 4.5.2 *A Kiválasztás Fül*, oldal 38. Alapértelmezettként csak az Elsődleges mód engedélyezett.

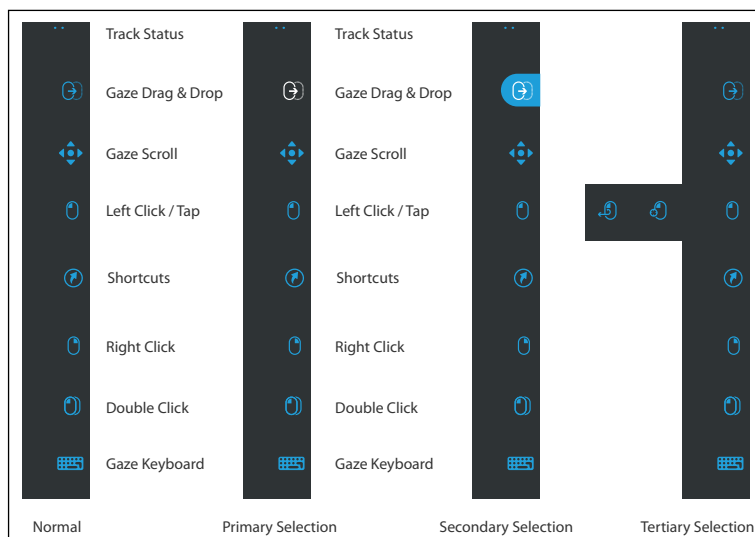

Ábra 3.2 A Windows Control Feladatsáv módjai

3.4 Szokásos Feladatok

Ikon	Feladat/Művelet	Leírás
	Kurzor Mozgatása	Feladat, mely lehetővé teszi a kurzor mozgatását tekintetével. Végrehajtásakor nagyítási műveletet hajt végre.
	Fogd és vidd tekintettel	Feladat, mely két "kattintást" végez, melyekből az első a fogd és vidd művelet kiindulási pontját jelenti, a második pedig az ejtési pozíciót (tárgya, illetve kiválasztott területek mozgathatóságához). • Válassza ki a Feladatot. • Tekintsen arra a tárgyra, amelyet mozgatni kíván, vagy a kiválasztott terület kezdeti pontjára. • Hajtsa végre a Windows Control második "kattintást" Tekintet vagy Kapcsoló révén. • Keresse azonnal tekintetével a tárgyat vagy a kiválasztott terület végpontját az ejtési helyen. • Hajtsa végre a második "kattintást" Tekintet vagy Kapcsoló révén. Végrehajtásakor nagyítási műveletet hajt végre.
	Görgetés tekintettel	Feladat, mely görgethető ablakban végrehajtva a görgetést az oldalon ellenőrzött módon teszi lehetővé. • Válassza ki a Feladatot. • Tekintsen bármely görgethető felületre és tartsa rajta tekintetét, és megjelenik a Görgetés Tekintettel ikon ott, ahová tekintett. • Nézzzen az ikon fölé a felfelé görgetéshez. • Nézzzen az ikon alá a lefelé görgetéshez. • Tekintsen balra az ikontól a balra görgetéshez. • Tekintsen jobbra az ikontól a jobbra görgetéshez. • Görgetés közben, tekintsen vissza az ikonra (a képernyőn, ne a Feladatsáv ikonra), a fel / le, illetve a bal / jobb váltakoztatásához. • Tekintsen vissza a Windows Control Feladatsávra (vagy a képernyőn kívülre) a görgetés befejezéséhez. Használja a Görgetés Tekintettel Feladatot a függőleges és vízszintes görgetéshez a Modern UI alkalmazások esetén és a Modern UI Windows Indítás Képernyő esetén.

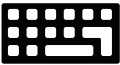Ikon	Feladat/Művelet	Leírás
	Bal kattintás / koppintás	Feladat, mely egyetlen bal kattintást, vagy érintés alapú eszközök esetén, egyetlen ujjbegy koppintást hajt végre. Kapcsoló módban a Bal kattintás / Koppintás Alapértelmezett és Rögzített" (lásd 3.8.1 Aktív alapértelmezetten Tekintet és Kapcsoló módszerrel, oldal 19). Végrehajtásakor nagyítási műveletet hajt végre.
	Parancsikonok	3 oszlop 3 oszlop előre meghatározott parancsikon. - Enyhén különbözik a Windows 7, 8.1 és 10 esetén létezőktől. További információk tekintetében, lásd 3.7 Parancsikonok, oldal 17.
	Jobb kattintás	Feladat, mely egyetlen jobb kattintást hajt végre. Végrehajtásakor nagyítási műveletet hajt végre.
	Dupla kattintás	Feladat, mely dupla bal kattintást hajt végre. Ha az aktiválási módszer beállítása Kapcsoló, akkor a Dupla Kattintás a "Rögzített Feladat" (lásd 3.8.1 Aktív alapértelmezetten Tekintet és Kapcsoló módszerrel, oldal 19). Végrehajtásakor nagyítási műveletet hajt végre.
	Tekintet billentyűzet	Feladat, a képernyőn Tekintettel aktivált billentyűzetet nyit meg Tekintettel történő begépeléshez. További információk tekintetében, lásd 3.9 Tekintet billentyűzet, oldal 20.
	Beállítások	Feladat mely nyitja a Windows Control Beállítások menüjét. További információk tekintetében, lásd 4 Windows Control Beállítások, oldal 24.

3.4.1 A Szokásos Feladat Megnyilvánulás a különböző módokban

Feladat	Elsődleges	Másodlagos	Harmadlagos ^a
Kurzor Mozgatása	Normál Nagyítás	Mély Nagyítás	Rögzített Kurzor Mozgatása Kapcsoló
Fogd és vidd	Normál Nagyítás	Mély Nagyítás	Rögzített Fogd és vidd vagy Biztonságos Fogd és vidd Kapcsoló
Görgetés tekintettel	Normál Nagyítás	Mély Nagyítás	Nem alkalmazható
Bal kattintás / koppintás	Normál Nagyítás	Mély Nagyítás	Rögzített Bal kattintás / koppintás vagy Biztonságos Bal kattintás Kapcsoló
Parancsikonok	Nincs Nagyítás	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Jobb kattintás	Normál Nagyítás	Mély Nagyítás	Rögzített Jobb kattintás / koppintás vagy Biztonságos Jobb kattintás Kapcsoló
Dupla kattintás	Normál Nagyítás	Mély Nagyítás	Rögzített Dupla kattintás / koppintás vagy Biztonságos Dupla kattintás Kapcsoló
Tekintet billentyűzet	További információk tekintetében, lásd 3.9 Tekintet billentyűzet, oldal 20.		
Beállítások	Nincs Nagyítás	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható

a. A különböző Rögzített Feladatokra vonatkozó további információkért, lásd 3.5 Rögzített Feladatok, oldal 15.

3.5 Rögzített Feladatok


Ikon	Feladat/Művelet	Leírás
	Rögzített Bal kattintás / koppintás	A rögzített feladatok lehetővé teszik egy feladat folyamatos aktiválását anélkül, hogy a feladatot ismételtelen ki kellene jelölni a Feladatsávon. Válassza ki egyszer a rögzített feladatot a Feladatsávról, és a kurzor követi tekintetét. A tekintet rögzítése a képernyőre elvégzi a megfelelő műveletet azon a helyen. A feladat a művelet elvégzése után aktív marad, vagyis nem kell újból aktiválni a Feladatsávról. A rögzített feladat megállításához egyszerűen nézzen rá a feladatra a Feladatsávon, amíg az többé nem lesz kijelölve.  A Rögzített Kurzor Mozgatása a másodlagos kiválasztási mód nem áll rendelkezésre, mivel ez a feladat csak a képernyő körül mozgatja a kurzort
	Rögzített Dupla kattintás	
	Rögzített Fogd és vidd	
	Rögzített Kurzor Mozgatása	
	Rögzített Jobb kattintás	

3.5.1 A Rögzített Feladat Megnyilvánulás a különböző módokban

Feladat/Művelet	Elsődleges	Másodlagos	Harmadlagos ^a
Rögzített Bal kattintás / koppintás	Normál Nagyítás	Mély Nagyítás	Bal kattintás / koppintás vagy Biztonságos Bal kattintás / koppintás Kapcsoló
Rögzített Dupla kattintás	Normál Nagyítás	Mély Nagyítás	Dupla kattintás / koppintás vagy Biztonságos Dupla kattintás / koppintás Kapcsoló
Rögzített Fogd és vidd	Normál Nagyítás	Mély Nagyítás	Fogd és vidd vagy Biztonságos Fogd és vidd Kapcsoló
Rögzített Kurzor Mozgatása	Nincs Nagyítás	Nem alkalmazható	Kurzor Mozgatása Kapcsoló
Rögzített Jobb kattintás	Normál Nagyítás	Mély Nagyítás	Jobb kattintás / koppintás vagy Biztonságos Jobb kattintás / koppintás Kapcsoló
a. A különböző Rögzített Feladatokra vonatkozó további információkért, lásd 3.4 Szokásos Feladatok, oldal 13.			

3.6 Biztonságos Kattintás

Ikon	Feladat/Művelet	Leírás
	Biztonságos Bal kattintás / koppintás	A Biztonságos Kattintás feladatok lehetővé teszik banki ügyletei stb. biztonságos végrehajtását a kétlépéses művelet miatti téves találatok kockázata nélkül. Előbb nagyítsa, majd válassza ki a végrehajtásra. Válassza ki a Biztonságos Kattintás feladatot a Harmadlagos kiválasztás Feladatsávról. A tekintet rögzítése a képernyőre elvégzi a megfelelő műveletet azon a helyen. A feladat új ablakban hajtja végre a nagyítást, ahol a tekintet rögzítése  ikonnal jeleníthető meg az ablakban, lásd <i>Ábra 3.3 Biztonságos Kattintás végrehajtása, oldal 16</i>. A Biztonságos Kattintás végrehajtására a  közepén, válassza a  ikont.  A Biztonságos Kattintás feladatok a Bal Kattintás, Jobb Kattintás, Dupla Kattintás és Fogd és vidd műveletekhez állnak rendelkezésre.
	Biztonságos Dupla kattintás	
	Biztonságos Jobb kattintás	
	Biztonságos Fogd és vidd	

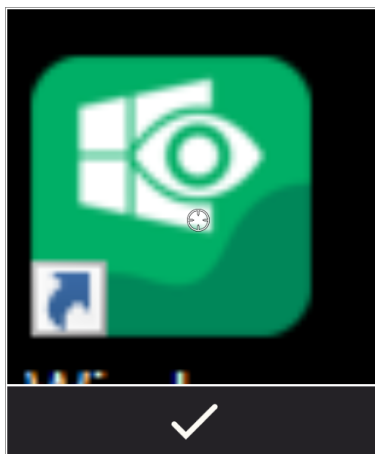

Ábra 3.3 Biztonságos Kattintás végrehajtása

3.7 Parancsikonok

Windows 8,1	Windows 10
The screenshot shows the Windows 8.1 Control Shortcuts menu. It contains 18 icons arranged in a 6x3 grid. The icons are: Minimize Window, Maximize Window, Close Window, Back, Browser, Speech Recognition, Undo, Volume Up, Virtual Remote, Copy, Mute, Desktop, Paste, Volume Down, Charms, Start, Search, App Switcher, Hide Taskbar, Switch Side, and Close Shortcuts.	The screenshot shows the Windows 10 Control Shortcuts menu. It contains 18 icons arranged in a 6x3 grid. The icons are: Minimize Window, Maximize Window, Close Window, Back, Browser, Speech Recognition, Undo, Volume Up, Virtual Remote, Copy, Mute, Desktop, Paste, Volume Down, Action Center, Start, Cortana, Task View, Hide Taskbar, Switch Side, and Close Shortcuts.



Ha a Parancsikon funkciót az ikon jelöli, akkor a parancsikon ablaka nyitva marad a funkció aktiválása után, és így akár több aktiválást is lehetővé tesz.

Parancsikon	Művelet	Win 8.1	Win 10	Leírás
	Ablak nagy méretűvé tétele	x	x	Parancsikon, mely nagy méretűvé teszi az aktív ablakot / alkalmazást / szoftvert.
	Vissza	x	x	Parancsikon, mely visszaviszi a felhasználót a web böngésző egyik oldalára, illetve bármely egyéb szoftverhez, melynek egyazon beépített funkcionalitása van.
	Visszavonás	x	x	Parancsikon, mely visszavonja a legutóbbi parancsot.
	Másolás	x	x	Parancsikon, mely másolja az aktív kiválasztást.
	Beillesztés	x	x	Parancsikon, mely beilleszti az előzőleg másolt kiválasztást.
	Indítás	x	x	Parancsikon, mely kiadja a Windows Indítás Menüt.

Parancsikon	Művelet	Win 8.1	Win 10	Leírás
	Feladatsáv elrejtése	x	x	Parancsikon, mely elrejt a Feladatsávot a Teljes Képernyő nézetben. A Feladatsáv visszanyerése érdekében, válassza a  vagy  opciót annak függvényében, hogy mely oldalon található a Feladatsáv.
	Ablak kis méretűvé tétele	x	x	Parancsikon, mely kis méretűvé teszi az aktív ablakot / alkalmazást / szoftvert.
	Böngésző	x	x	Parancsikon, mely az alapértelmezett web böngészőt indítja.
	Hangerő fel	x	x	Parancsikon, mely a hangerőt növeli.
	Elnémítás	x	x	Parancsikon, mely a hangszórókat elnémítja.
	Hangerő le	x	x	Parancsikon, mely a hangerőt csökkenti.
 	Keresés Cortana	x	x	Parancsikon, mely megnyitja a Keresés funkciót a Windowsban. Parancsikon, mely megnyitja a Cortanát. Cortana az ön intelligens személyes asszisztense, és a Cortana segítségével navigálhat a világhálón, kereshet személyes számítógépén, nyomon követheti a naptárt, stb.
	Kapcsoló oldal	x	x	Parancsikon, mely a Feladatsávot jobbról / balról elmozdítja.
	Ablak zárása	x	x	Parancsikon, mely bezárja az aktív ablakot / alkalmazást / szoftvert.
	Beszédfelismerés	x	x	Parancsikon, mely megindítja a Windows Beszédfelismerés, vagy Dragon Beszédfelismerés funkcionálisát, ha telepítve van.
	Virtual Remote	x	x	Parancsikon mely megnyitja a Virtuális Remote alkalmazást. További információk tekintetében, lásd 5 <i>Virtual Remote</i> , oldal 41.
	Asztal	x	x	Parancsikon, mely kiadja az Asztalt.
 	Charms Cselekvésközpont	x	x	Parancsikon, mely kinyitja a Charms Menüt. Parancsikon, mely kinyitja a Cselekvésközpontot.
	Alkalmazás kapcsoló	x		Parancsikon, mely átpáztáz valamennyi futtatott Modern UI alkalmazást és az Asztalt.  Az Asztalon futó szoftverek itt láthatatlanok lesznek. Ezek csak az Asztalon láthatók.

Parancsikon	Művelet	Win 8.1	Win 10	Leírás
	Feladat nézet		x	Parancsikon, mely nyitja a Feladat nézetet, melyben minden futtatott Modern User Interface (UI) alkalmazás látható.  A Feladat nézet nem mutatja, hogy csak egy, vagy kevesebb alkalmazás van nyitva.
	Parancsikonok bezárása	x	x	Parancsikon, mely bezárja a Parancsikonok menüt.

3.8 Kiválasztási módszer — Tekintet vagy Kapcsoló

Két mód van kiválasztott Feladat teljesítésére.

- Tekintet — szem használatával a kiválasztott Feladat vezérléséhez és teljesítéséhez egyaránt.
- Tekintet és Kapcsoló — szem használata és készülékhez csatlakoztatott mechanikus gomb használata a kiválasztott Feladat végrehajtásához.

A választható módszert a Windows Control Beállítások párbeszédpanelben kell beállítani, lásd *4 Windows Control Beállítások, oldal 24.*

Kiválasztás teljesítése előtt válasszon Feladatot a Feladatsávból a teljesítéshez. Tekintsen a kiválasztott feladatra mindaddig, míg az "Elsődleges" vagy "Másodlagos" kiválasztás gyanánt nem mutatkozik.

- **Tekintet** - Kiválasztott Feladat teljesítéséhez tartsa tekintetét a képernyő óhajtott részén (vagy ikonon a képernyőn), ahol a Feladatot végre óhajtja hajtani.. Az automatikus nagyítás funkció aktiválódik és befejeződik az ikon kiválasztása, illetve a feladat végrehajtása.
- **Tekintet és Kapcsoló** - Két különböző végrehajtási mód..
 - **A Kapcsoló egyszerű aktiválása** - a nagyítás funkció éppúgy teljesít, mint a Tekintet módszer és pedig azokkal a beállításokkal, amelyeket a Windows Control Beállítások párbeszédpanelben kell beállítani, lásd . *4 Windows Control Beállítások, oldal 24.*
 - **A Kapcsoló aktiválása és megtartása** - a nagyítás funkció folyamatosan nagyít és csak akkor fejeződik be, amikor a kapcsoló kioldását / inaktíválását megszünteti.



A Tekintet módszer használata esetén vissza kell tekintenie a Feladatsávra új Feladat kiválasztásához mindegyik feladat végrehajtása **előtt**.



Ha a Nagyítási mélység Egyszintűre van állítva a Windows Control Beállításoknál - nagyítás nem történik. További információk tekintetében, lásd *4 Windows Control Beállítások, oldal 24.*

3.8.1 Aktív alapértelmezetten Tekintet és Kapcsoló módszerrel

Ha a Tekintet és Kapcsoló módszert használja, akkor a "rögzített feladat" funkcionalitás kerül használatra.

Ha a Feladat „aktív alapértelmezetten” lesz, akkor az azt jelenti, hogy nem kell tekintetét visszairányítania a Feladatsávra, ha ismételn óhajtja a kiválasztott Feladat teljesítését, csak amennyiben a Feladatot egyébre óhajtja módosítani.

Ha a Tekintet és Kapcsoló módszert használja, akkor a Bal Kattintás / Koppintás Feladat "aktív" alapértelmezetten. Ez azt jelenti, hogy a Bal Kattintás / Koppintás mindig Be van kapcsolva és mindig aktiválódik, valahányszor a kapcsoló aktiválódik, ha semmi egyéb nem került kiválasztásra. Ha egyéb Feladatot választ, ez csak egyszer (egyetlen kiválasztás erejéig) lesz aktív, majd Windows Control automatikusan alapértelmezetten áll vissza Bal kattintás / Koppintás opcióra a rákövetkező kiválasztásokat illetően.

Ez a kivétel a Dupla Kattintás Feladat; ha ez van kiválasztva, amikor a Tekintet és Kapcsoló módot használják, ez is alapértelmezetten ez is aktív.

Ezért nagyszerűen használható például az interneten való gyors / folyamatos navigáláshoz úgy, hogy aktiválja a Kapcsolót és ezáltal a Bal Kattintás / Koppintás opcióhoz egyszer, majd ismételten kiválasztva bármit, amit óhajt, anélkül, hogy a Bal Kattintás / Koppintás opciót ismét megannyiszor ki kellene választania.

3.8.2 Feladat aktiválása Billentyűzettel Kapcsoló helyett



Az F12 Billentyűzet gomb választásával, csatlakoztatott billentyűzeten Feladat kijelölés aktiválódik. Pont úgy lehet használni, mint a csatlakoztatott kapcsolót. További információk tekintetében, lásd 3.8 Kiválasztási módszer — Tekintet vagy Kapcsoló, oldal 19.

3.9 Tekintet billentyűzet

A Tekintet Billentyűzet kiválasztásával a Feladatsávon, a Tekintet Billentyűzet képernyő billentyűzet gyanánt indul. A Tekintet bil-

lentyűzet mindig a képernyő alsó részén nyílik meg. Ez a  (Billentyűzet mozgatása Fel / Le) gombbal mozgatható a Billentyűzet Feladatsávon.

A Tekintet billentyűzettel együtt indul a Billentyűzet Feladatsáv is. További információk tekintetében, lásd 3.9.1 Billentyűzet Feladatsáv, oldal 21.

A Tekintet Billentyűzet négy billentyűzet oldalból áll, melyek körforgásban lapozhatók. A felhasználó könnyen válthat a különböző billentyűzet oldalak között úgy, hogy kiválasztja a következő oldal gombjait a Tekintet Billentyűzet minden oldalán a távoli bal és jobb billentyűket.

Azt a billentyűt, amelyre a felhasználó tekint a billentyűzeten, világos keret jelöli a billentyűn található karakter / funkció körül.




A négy billentyűzet oldal a következő:

		Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	
<	Ctrl	A	S	D	F	G	H	J	K	L	!	→
	↑	Z	X	C	V	B	N	M	,	.	?	⌋

Ábra 3.4 Alapértelmezett Indítási Oldal

		/	*	7	8	9	+	(	)	"	#	
<	Ctrl	\	.	4	5	6	-	<	>	&	'	→
	↑	%	0	1	2	3	=	;	:	_	@	⌋

Ábra 3.5 Első Oldal Jobbra

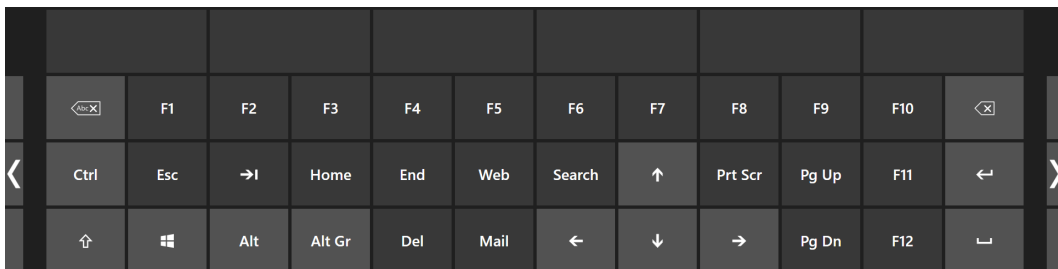

Ábra 3.6 Második oldal Jobbra vagy Balra



Ábra 3.7 Első Oldal Balra

A billentyűzet nyelvének és a billentyűzet egyéb beállításának módosításához, lásd *4 Windows Control Beállítások, oldal 24*.



A Shift, Ctrl, Alt, Win és Alt Gr billentyűk "rögzülnek" amint kijelölésük megtörtént. Ez azt jelenti, hogy kijelölten maradnak mindaddig, míg a felhasználó a billentyűzetről újabb billentyűt nem választ. Rögzített voltokat megtartják, ha a következő kiválasztott billentyű irt rögzített billentyű.



Ékezetes betű írásához:


1. Válassza ki az ékezetet
2. Válassza ki a karaktert
3. A karakter a választott ékezzel jelenik meg.

3.9.1 Billentyűzet Feladatsáv

A Billentyűzet Feladatsáv felső részén Állapotkövető nézet van éppúgy, mint a Windows Control Feladatsávon. Lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a szemkövető felismeri-e szemét és azok jól helyezkednek-e el a készülék előtt.

A Feladat gombok a Billentyűzet Feladatsávban három különböző módon lehetnek, lásd *Ábra 3.8 A Billentyűzet Feladatsáv módjai, oldal 21*.

A különböző módokra vonatkozó további információkért, lásd *3.3.1 A Windows Control Feladatsáv módjai, oldal 12*.

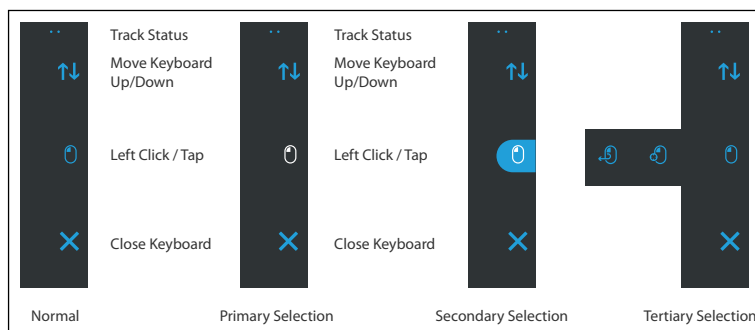

Ábra 3.8 A Billentyűzet Feladatsáv módjai:



A Harmadlagos kiválasztás csak a Bal Kattintás feladatban áll rendelkezésre a Billentyűzet Feladatsávon.




A Windows 8.1 és a Windows 10 esetén a színek a Billentyűzet Feladatsávon a Windows beállításokhoz alkalmazkodnak.

3.9.2 Feladat gombok a Billentyűzet Feladatsávhöz

Ikon	Feladat/Művelet	Leírás
	Billentyűzet mozgatása Fel / Le	Feladat, mely a Billentyűzetet a képernyő felső vagy alsó részére költözteti. A funkció aktiválásához várakoztassa tekintetét a gombon.
	Bal kattintás / koppintás	Feladat, mely egyetlen bal kattintást, vagy érintés alapú eszközök esetén, egyetlen ujjbegy koppintást hajt végre.
	Bezárás	Feladat, mely a billentyűzetet bezárja.

3.9.3 Szó előrejelzés

A sz előrejelző motor, melyet a Windows Control használ a SwiftKey szoftveré és rendszerint ezt használják a táblagépeknél és az okostelefonoknál. A SwiftKey olyan mesterséges intelligencia technológiák keveréke, mely lehetővé teszi a következő szó előrejelzését, amit a felhasználó gépelni akar. A SwiftKey a felhasználó által begépelte előző szövegekből tanul, előrejelzéseit pedig az aktuálisan begépelte szövegre és arra alapozza, amit már megtanult. A Szó Előrejelzés nyelvezete a Billentyűzeti nyelv beállításának függvényében módosul.

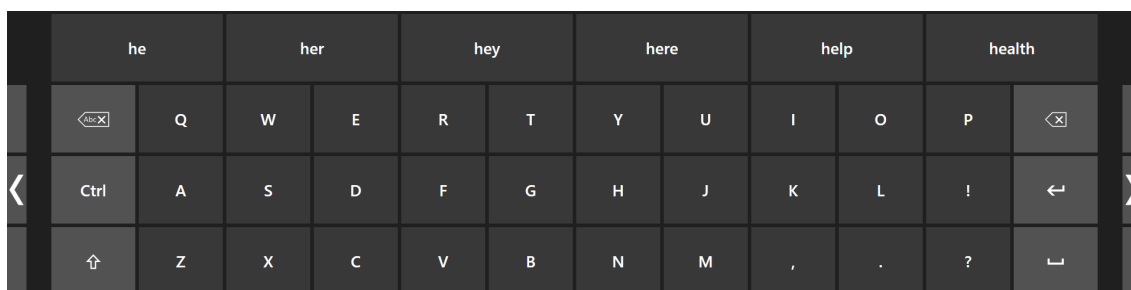


Ábra 3.9 Szó Előrejelzés a Billentyűzetnél aktiválva

Ha a Szó előrejelzés használatban van, lásd 4 *Windows Control Beállítások, oldal 24* további információért a Szó Előrejelzés aktiválását / inaktíválását, hat (6) négyzet jelenik meg a Billentyűzet fölött. Balról a legszélső négyzet jeleníti meg a legnagyobb valószínűséggel előrejelzett szót, a többi öt (5) négyzet pedig egy-egy előrejelzett szót tartalmaz. Előrejelzett szó kiválasztásához jelölje egyszerűen ki a helyes szót tartalmazó négyzetet. Ha nem találja azt a szót, amit keres, gépeljen tovább, hisz remélheti, hogy az ön által keresett szó a következő karakter után felbukkan.



Ha a Szó előrejelzést használja és ékezetes szót akar gépelni, mint például a *café* szót, akkor gyakran jobb a Szó előrejelzést hagyni, hogy kezelje az ékezetet. Gépelje be egyszerűen azt, hogy *cafe* és javaslatot kap a *café* írásmódra.

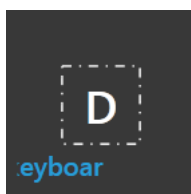


Miközben a felhasználó gépel, az utolsó 5-10 karakter kéken jelenik meg a hivatkozott / kiemelt billentyűn. További információk tekintetében, lásd 4 *Windows Control Beállítások, oldal 24*. Ez a tulajdonság segíti a felhasználót könnyen beazonosítani az elírásokat és csökkenti annak szükségességét, hogy a szöveg beillesztésének helyét figyelje, tehát növeli a gépelési sebességet.

3.10 Windows Control Régió Alapú Alkalmazásokkal kombináltan

Windows Control használható egyéb szemvezérelt alkalmazással. A "Tekintettel aktivált" régiók egyéb alkalmazásokban addig aktívak, míg nincs aktív Feladat a Windows Control Feladatsávon. Ha a Windows Control vezérlőt használja a Tekintet és Kapcsoló módban, akkor a Feladat gombok mindig "aktívak alapértelmezetten", Feladat kiválasztásának megszüntetéséhez csak tekintsen vissza a kiválasztott Feladatra pillantás erejéig.

3.11 Eye Detection Indicator

A **Eye Detection Indicator**, , diszkrét mutató, a Tévékenység mezőben a Windows alatt.

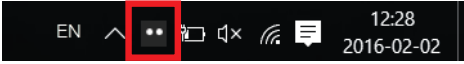, megjelenítése, ha a Windows Control érzékelte a felhasználó szemét.

Az **Eye Detection Indicator** különböző állapottal rendelkezhet.:


- Szemek érzékelve (,).



Elhelyezkedési útmutatóként is szolgál a felhasználó számára.

- Szem nem került érzékelésre, (,).
- Nincs szemkövető csatlakoztatva, illetve a szemkövető inaktív, (,).

4 Windows Control Beállítások

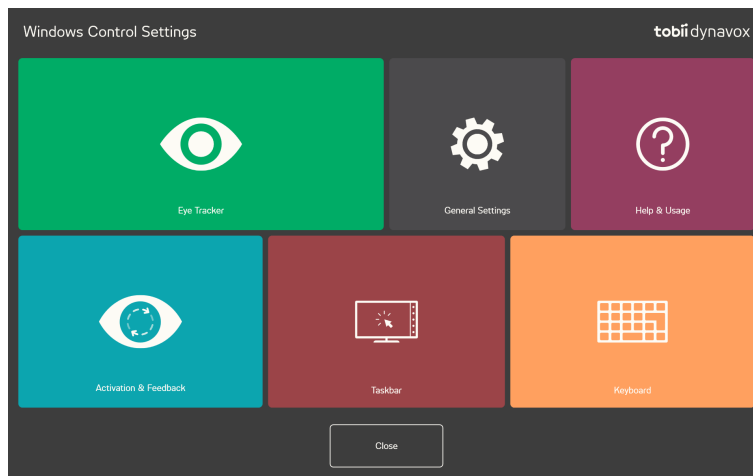


Ikonok	Művelet	Leírás
	Szemkövető	Megnyitja az Szemkövető beállításokat. További információk tekintetében, lásd 4.1 Szemkövető , oldal 25.
	Általános Beállítások	Megnyitja az Általános beállításokat. További információk tekintetében, lásd 4.2 Általános Beállítások , oldal 31.
	Segítség és Használat	Megnyitja a Segítség és Használat beállításokat. További információk tekintetében, lásd 4.3 Segítség és Használat , oldal 32.
	Aktiválás és visszajelzés	Megnyitja az Aktiválás és visszajelzés beállításokat. További információk tekintetében, lásd 4.4 Aktiválás és visszajelzés , oldal 33.
	Feladatsáv	Megnyitja a Feladatsáv beállításokat. További információk tekintetében, lásd 4.5 Feladatsáv , oldal 36.
	Billentyűzet	Megnyitja a Billentyűzet beállításokat. További információkért, lásd 4.6 Billentyűzet , oldal 39.

4.1 Szemkövető



4.1.1 A Kalibrálás fül

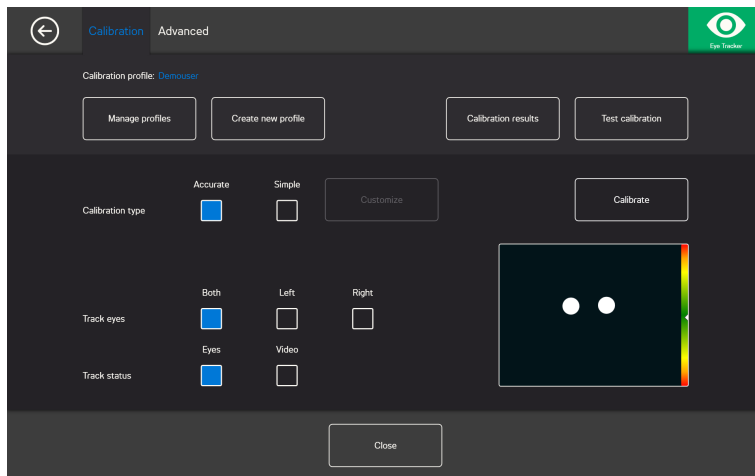

Kalibrálási profil: Az aktív profil nevét jeleníti meg.

Profilok kezelése: A gomb kiválasztásával módosítható egy már létező profil. További információk tekintetében, lásd 4.1.1.1 Profilok kezelése, oldal 25.

Új profil létrehozása: A gomb kiválasztásával új profil hozható létre. További információk tekintetében, lásd 4.1.1.2 Új profil létrehozása, oldal 26.

Kalibrálási eredmények: A gomb kiválasztásával megtekintheti a kalibrálás eredményeit. További információk tekintetében, lásd 4.1.1.3 Kalibrálási Eredmények, oldal 26.

Próbakalibrálás: A gomb kiválasztásával megnyitható a próbakalibrálás oldal. További információk tekintetében, lásd 4.1.1.4 Próbakalibrálás, oldal 27.

A kalibrálás típusa: Két (2) különböző kalibrálási típus van: **Pontos** vagy **Egyszerű**. További információk tekintetében, lásd 4.1.1.6 A kalibrálás típusa, oldal 28.

Szemek követése: Válassza ki az alábbiak közül, hogy az eszköz hogyan kövesse a felhasználó szemeit: **Mindkettő**, **Bal** vagy **Jobb**.

4.1.1.1 Profilok kezelése

A Profilok kezelése oldalon aktiválni vagy törölni tud létező profilekat.

A képernyő közepén, az Aktív profil alatt, az aktív profil nevét láthatja.

Az összes választható profil gombként jelenik meg az oldalon, a választható profilek közötti görgetéshez használja a  és  gombot.

4.1.1.1.1 Profil aktiválása

1. Válassza ki az aktiválandó profil nevét tartalmazó gombot.
2. Válassza a képernyő jobb felső sarkában lévő **Aktiválás** gombot.
3. Válassza a kiválasztott profil aktiválásához az **Igen**, vagy a visszavonáshoz a **Nem** lehetőséget.
4. Az oldal elhagyásához válassza a **Bezárás** gombot.

4.1.1.1.2 Profil törlése

1. Válassza ki a törlendő profil nevét tartalmazó gombot.

2. Válassza a képernyő bal felső sarkában lévő **Törlés** gombot.
3. Válassza a kiválasztott profil törléséhez az **Igen**, vagy a visszavonáshoz a **Nem** lehetőséget.
4. Az oldal elhagyásához válassza a **Bezárás** gombot.

4.1.1.2 Új profil létrehozása

1. Válassza ki a használandó **Kalibrálási típust**.
További információk tekintetében, lásd 4.1.1.6 A kalibrálás típusa, oldal 28.
2. Válassza az **Új profil létrehozása** gombot.
3. Válassza a folytatáshoz az **Igen**, vagy a visszavonáshoz a **Nem** lehetőséget.
4. Adja meg az új profil nevét.



Billentyűzetet és egeret kell használnia.


Csak alfanumerikus karakterek használhatók.

5. Válassza a **Következő** gombot.
6. A felhasználó úgy helyezkedjen el, hogy a felhasználó szeméit ábrázoló két pont a képernyőn megjelenő négyzet közepén legyen.
A kalibrációs folyamat akkor indul, amikor a felhasználónál a jobb oldali pont villog.
7. Kövesse a kalibrálás elvégzéséhez a képernyőn megjelenő utasításokat.
8. Jelölje be a Kalibrálási Eredmények négyzetet.
További információk tekintetében, lásd 4.1.1.3 Kalibrálási Eredmények, oldal 26.
9. A kalibrálás elfogadásához válassza a **Bezárás** gombot.

4.1.1.3 Kalibrálási Eredmények



Ez csak az IS-4 szemkövetőkön működik, vagyis az IS-20 és IS-3 szemkövetőkön nem. A használt Szemkövető platformra vonatkozó további információkért lásd a Szemkövető Műszaki specifikációit.

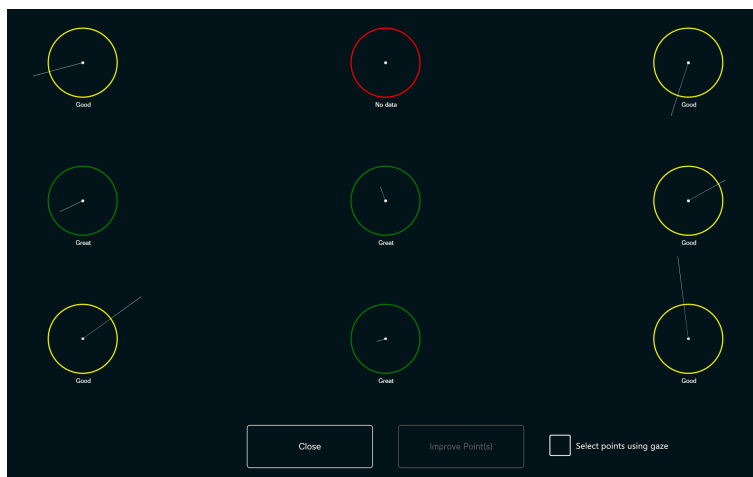

A kalibrálási eredmények oldalon megtekintheti mindegyik kalibrálási pont kalibrálási eredményeit. Az oldalon megjelenő kalibrálási pontok száma az Ön által választott kalibrálás típusától és a kalibrálás testreszabásától függ.

A kalibrálási pontnak három (3) különböző állapota lehet:

- Nagyszerű (zöld)
- Jó (sárga)
- Nincs adat (piros)




Ha a kalibrálás típusa a Pontos, a kalibrálás automatikusan újraindul, ha a szemkövető nem kap adatokat egy kalibrálási pontból.

4.1.1.3.1 Kalibrálási pontok javítása


Ha egy kalibrálási pontot javítani kell, kövesse ezeket a lépéseket.

1. Váltsa a **Pontok kijelölése tekintettel** Be/kikapcsolás jelölőnégyzetet **Be** opcióra, hogy tekintetével aktiválja a kalibrálási pontokat annak érdekében, hogy tekintetével ki tudja jelölni őket. (Opcionális)
2. Jelölje ki a kalibrálási pontokat javításra.

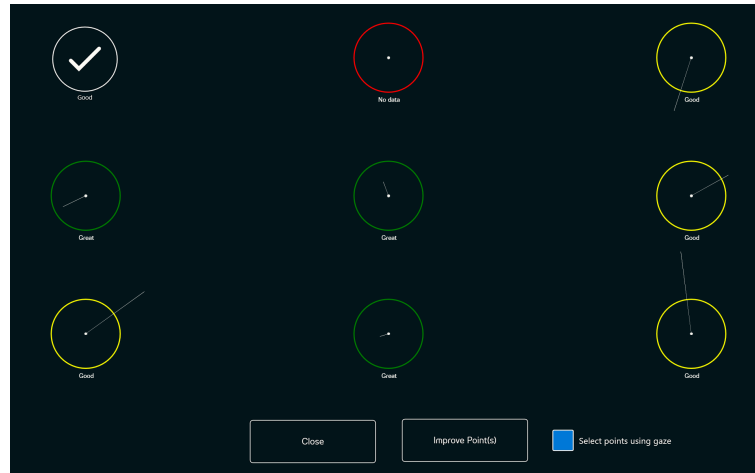

3. Válassza a **Pont(ok) javítása** gombot a kalibrálás elkezdéséhez a kiválasztott kalibrálási pontokban.
4. Szükség esetén ismételje meg az 1. – 3. lépést.

4.1.1.4 Próbakalibrálás

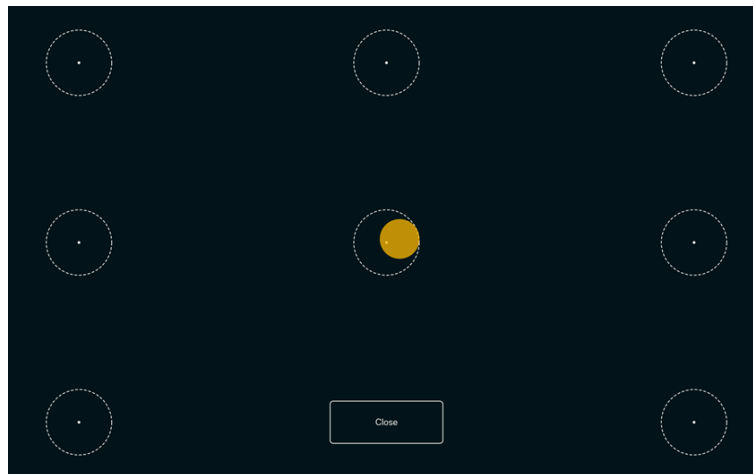

A Próbakalibrálás oldalon kipróbálható a kalibrálás a képernyőn lévő előre meghatározott célpontok használatával, annak megállapítására, hogy a felhasználónak újra kell-e kalibrálnia a szemkövetőt.

1. Nézzon meg a képernyőn lévő minden körben minden pontot annak megállapítására, hogy az illető területen mennyire pontos a szemkövetés.
2. Ha végezt, kattintson a **Bezárás** gombra.

4.1.1.5 Újrakalibrálás

1. Válassza ki a használandó **Kalibrálási típust**.
További információk tekintetében, lásd 4.1.1.6 A kalibrálás típusa, oldal 28.
2. Az aktív profil új kalibrálási folyamatának elkezdéséhez válassza az **Újrakalibrálás** gombot.
3. Kövesse a kalibrálás elvégzéséhez a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Jelölje be a Kalibrálási Eredmények négyzetet.

További információk tekintetében, lásd 4.1.1.3 Kalibrálási Eredmények, oldal 26.

5. A kalibrálás elfogadásához válassza a **Bezárás** gombot.

4.1.1.6 A kalibrálás típusa

Két (2) különböző kalibrálási típus választható: **Pontos** és **Egyszerű**.

4.1.1.6.1 Pontos

Válassza a **Pontos** négyzetet a legpontosabb kalibrálási típus aktiválásához.

Ha a Pontos kalibrálási típus van aktiválva, a kalibrálási folyamat hét (7) pontos, "pop the dots" kalibrálás lesz. A Pontos kalibrálási típus az alapértelmezett kalibrálási típus.

4.1.1.6.2 Egyszerű

Az egyéni kalibrálási folyamathoz jelölje be az **Egyszerű** négyzetet.

Az egyéni kalibrálási folyamathoz válassza az Egyszerű gomb melletti **Egyéni** gombot.



Kalibrálási pontok: Válassza ki, hogy 1, 2, 5, vagy 9 kalibrálási pontot használ.



Az 1 pontos kalibrálás a PCEye Go eszközön nem áll rendelkezésre.

Átlépés: Váltsa át az Átlépés be-/kikapcsolása jelölőnégyzetet Be értékre hogy aktiválja a funkciót, amelyben a billentyűzet „S” billentyűjét használja, vagy kattintson/kattintson a képernyőre a kalibrálás átlépéséhez.

Kalibrálási terület: További információk tekintetében, lásd 4.1.1.6.2.1 Kalibrálási terület, oldal 29.

Inger:

Válassza a **Böngészés** gombot, hogy az **Inger** beállítást az alapértelmezett fehér pontról az alábbira módosítsa:

- A választható ingerek egyikére, Képre vagy Videóra
- A felhasználó kedvenc játékának képére
- Kedvenc videóra
- Vagy valami másra.

Háttér: Válassza a **Háttér** gombot a háttérszín módosítására a kalibrálási eljáráshoz.

Ingersebesség: Válassza ki az inger sebességét, amivel három különböző szinten mozgathatja tekintetét a képernyőn:

- Lassú
- Közepes
- Gyors

Ingerméret: Válassza ki az inger méretét, ha az inger három különböző szint között jelenik meg a képernyőn:

- Kicsi
- Közepes
- Nagy

Bezárás: Az oldal elhagyásához válassza a **Bezárás** gombot.

4.1.1.6.2.1 Kalibrálási terület

Válassza a **Kalibrálási terület** gombot, hogy testre tudja szabni a kalibrálási terület.



A kalibrálási terület testreszabása hasznos lehet, ha észrevette, hogy a felhasználó a Windows Control funkciót használva nem férhet hozzá a képernyő bizonyos területeihez. A teljes kalibrálás javítható, ha méretezi a kalibrálást, hogy kizárja azokat a területeket, amelyekhez a felhasználó nem férhet hozzá.


A kalibrálási területet áthelyezheti és átméretezheti, hogy az illeszkedjen előnyben részesített képernyőterületéhez.



Válassza ki az alábbi gombok egyikét:

- **OK** — hogy a kalibrálási terület az Ön által megadott méretben jelenjen meg, és hogy kilépjen a kalibrálási terület beállításból.
- **Mégse** — a módosítások elvetésére és a kalibrálási terület beállításból való kilépésre.
- **Alapértelmezett** — a kalibrálási terület gyári alapértékekre való visszaállításához.

4.1.2 A Speciális fül

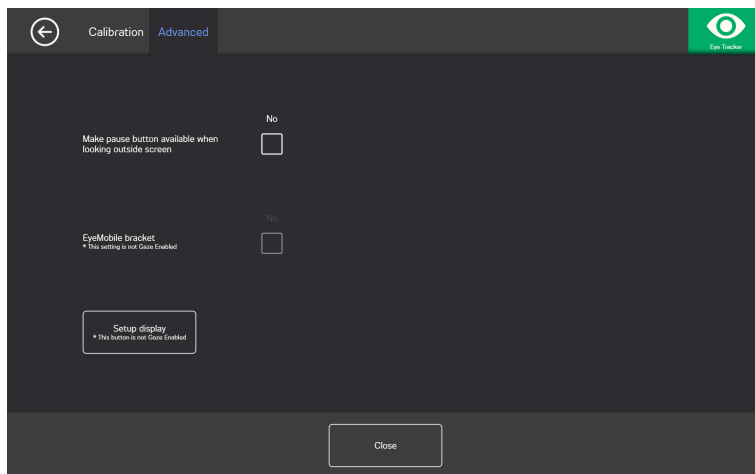

Tegye elérhetővé a szünetelés gombot, ha képernyőn kívülre néz: Váltsa át a be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet **Be**, értékre, ha a szünetelés gomb jelenik meg a képernyőn, amikor a felhasználó a képernyőn kívülre néz, hogy a felhasználó könnyen szüneteltethesse és újraindíthassa a szemkövetést.


EyeMobile tartó: Váltsa át az EyeMobile tartó be-/kikapcsolása jelölőnégyzetet **Be**, értékre, ha EyeMobile vagy EyeMobile Mini eszközt használ. Az EyeMobile tartó beállítása nem vonatkozik az EyeMobile Plus eszközre, és ezért inaktív.

4.1.2.1 Kijelző konfigurálása


Ha több mint egy (1) képernyőt használ, meg kell adnia, hogy a szemkövető melyik kijelzőhöz csatlakozik. A rendszernek a használt kijelző méretét is ismernie kell.



Ez csak a Kiterjesztett Asztalon működik, a Megkettőzött Asztalon nem.

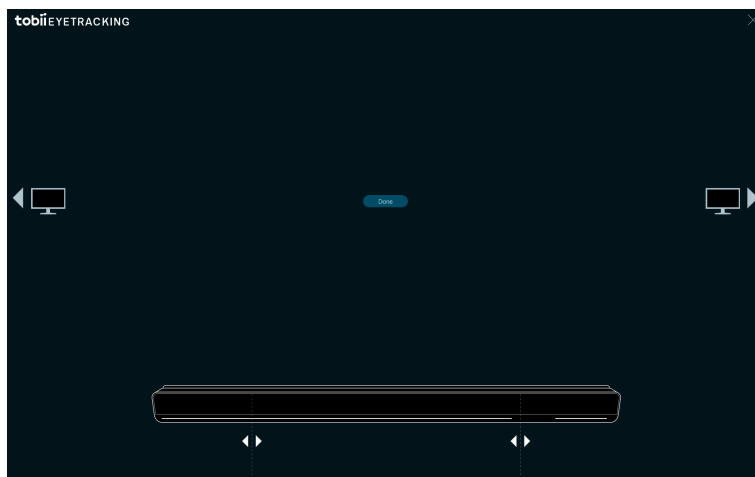

1. Használja a  vagy  gombot annak kiválasztására, hogy a szemkövető melyik kijelzőhöz van csatlakoztatva.
2. Állítsa egy vonalba a bal és jobb függőleges vonalat, amelyek a szemkövető képernyőn lévő megjelenítése alatt vannak, a jelölésekkel, amelyek a használatban lévő szemkövető felső részén vannak.

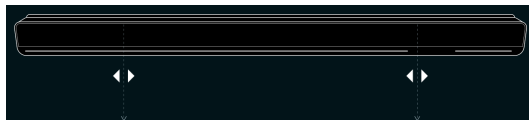


Ez beállítja a Windows Control szoftverhez használt képernyőméretet.

3. A véglegesítéshez használja a **Kész** gombot

4.2 Általános Beállítások




4.2.1 Az Általános fül

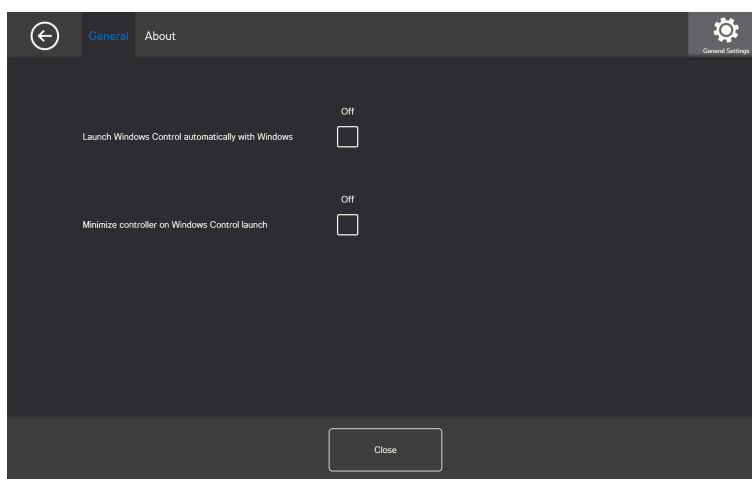

Indítsa el a Windows Control szoftvert automatikusan a Windows rendszerrel: Váltsa a Be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet a **Be** opcióra, ha a Windows Vezérlőnek automatikusan indulnia kell, amikor a Windows indul..

Állítsa kis méretűre a vezérlőt a Windows indításakor: Váltsa a Be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet a **Be** lehetőségre, ha a Windows Control vezérlőt kis méretűre kell állítani, amikor a Windows indul.

4.2.2 A Névjegy fül

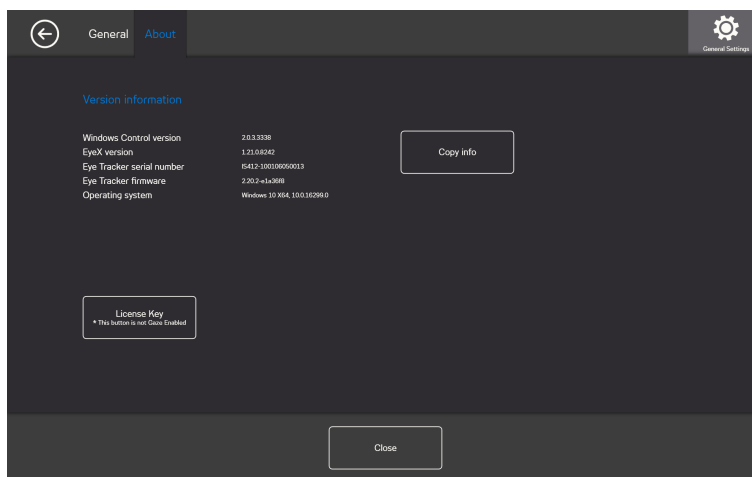

A Névjegy oldalon található minden Verzióról információ a szoftverről és a Szemkövető hardverről. Ezt az információt könnyű lemásolni ennek kijelölésével: **Információ másolás** majd be kell illeszteni e-mailbe vagy bármely egyéb szoftverbe, szükség szerint.

4.2.2.1 Licenc kód




A Licenc gombot nem Tekintet aktiválja, ezért kérjük, kérjen fel valakit, hogy segítsen, ha a licencet módosítani óhajtja.

A licenc aktiválásához, lásd 2.2.1 *A licenc aktiválása, oldal 6.*

A licenc inaktiválásához, lásd 2.2.2 *A licenc inaktiválása, oldal 8.*

4.3 Segítség és Használat

4.3.1 A Segítség fül

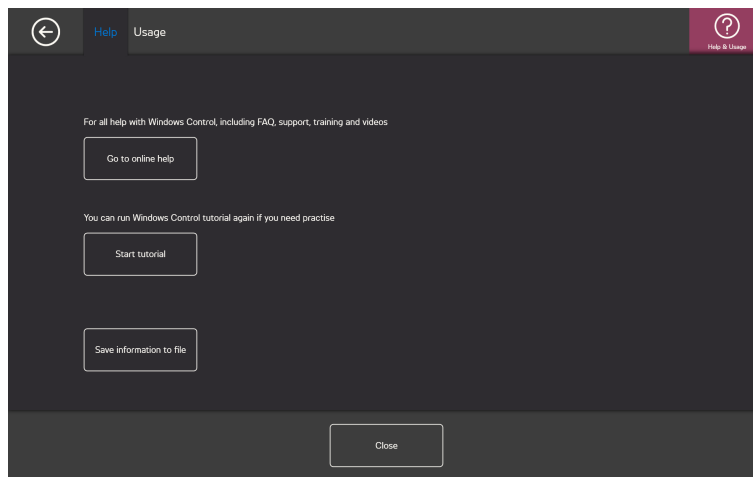

Válassza az **Ugrás az online segítséghez** gombra, hogy megnyissa a Tobii Dynavox terméktámogatás oldalak megnyitásához az interneten az alapértelmezett böngészőben, A támogatási honlapokon a felhasználó talál GYIK-eket, támogatást, képzést, videókat és dokumentációt a Windows Control vezérlőtől és a Tobii Dynavox más termékeiről.




Győződjön meg, hogy a számítógépnek/eszköznek van internetkapcsolata.

Válassza az **Indítás oktatóanyag** gombot a kapcsolódó oktatóanyag futtatásához, ha a felhasználónak többet kell gyakorolnia. Az oktatóanyagot a felhasználó tetszés szerinti alkalommal indíthatja.

Válassza az **Adatok mentése fájlba** gombot az összes fontos napló másolására, ha segítségre van szüksége. Ez a fájl könnyen csatolható e-mailhez és elküldhető az ügyfélszolgálati csapatnak.

4.3.2 A Használat fül

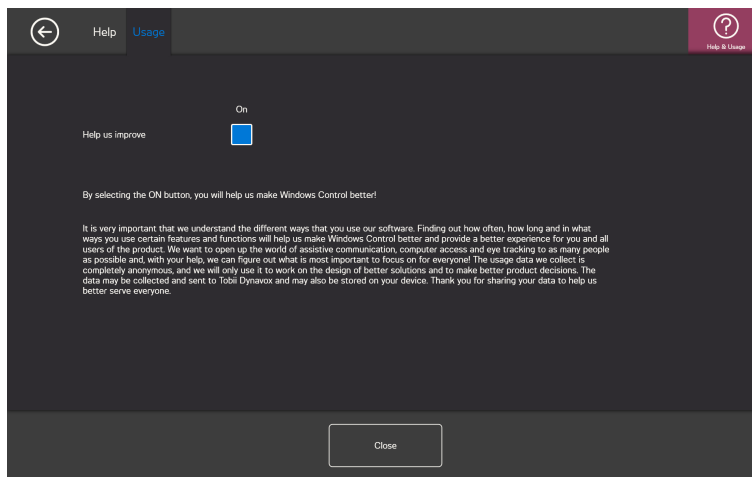


Segítségnyújtás a fejlesztéshez: Segíthet a Tobii Dynavox cégnek a szoftver fejlesztésében, ha a Be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet **Bekapcsolás** lehetőségre váltja.

4.4 Aktiválás és visszajelzés



4.4.1 Az Aktiválás fül

4.4.1.1 Tekintet beállítások

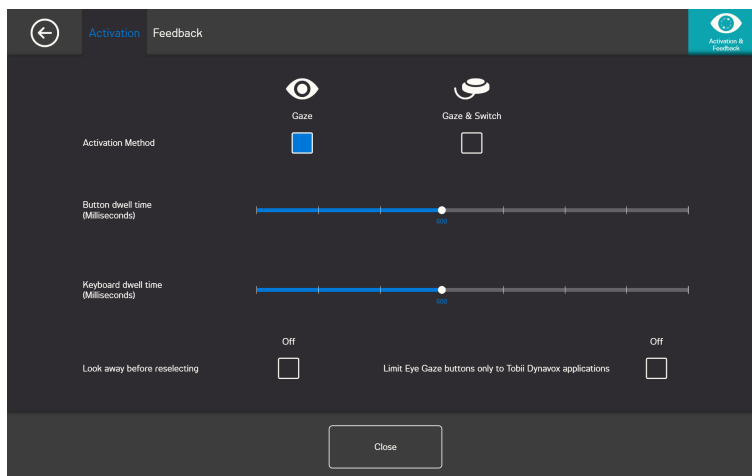

Az Aktiválás fülnél az összes beállítás arra vonatkozóan, hogy miként kell a felhasználónak eljárnia, ha a Windows Control be van állítva. Ha a felhasználónak a Tekintet vagy Tekintet és Kapcsoló lehetőséget kell használnia a parancsok végrehajtásához és hogyan nyilvánul meg a kölcsönhatás.

Aktiválási módszer:

- **Tekintet** - Válassza a Tekintet lehetőséget a nagyítás funkció tekintet révén történő aktiválásához, ami az óhajtott Feladatot végrehajtásával végződik.
- **Tekintet és Kapcsoló** - Válassza a Tekintet és Kapcsoló lehetőséget a nagyítás funkció kapcsoló révén történő aktiválásához, ami az óhajtott Feladat végrehajtásával végződik.

Gomb Várakozási Idő (milliszekundum)

A Gomb Várakozási Idő 8 különböző szintre állítható, s csak rá kell tekinteni az óhajtott helyre a beállítás módosításához. Gomb Várakozási Idő módosításával igazítani lehet, hogy meddig kell a felhasználónak tartania tekintetét a gombon, mielőtt a Feladat teljesítésre kerülne. A skálán a kisebb Gomb Várakozási Idő balra, a nagyobb pedig jobbra jelenik meg.

Billentőüzet Várakozási Idő (milliszekundum)

A Billentyűzet Várakozási Idő 8 különböző szintre állítható, 8 különböző szintre állítható, s csak rá kell tekinteni az óhajtott helyre a beállítás módosításához. Billentyűzet Várakozási Idő módosításával igazítani lehet, hogy meddig kell a felhasználónak tartania tekintetét a billentyűzeten, mielőtt a Feladat teljesítésre kerülne. A skálán a kisebb Billentyű Várakozási Idő balra, a nagyobb pedig jobbra jelenik meg.


Nézzon félre, mielőtt újra kijelölne.

- **Be** - Válassza a **Be** opciót a **Nézzon félre, mielőtt újra kijelölne** aktiválására. Amikor a funkció **Be**, van kapcsolva, a felhasználónak először félre kell néznie az aktív tekintet régiójából, hogy újból aktiválhassa ugyanazt a tekintet régiót.
- **Ki** - Válassza a **Ki** opciót a **Nézzon félre, mielőtt újra kijelölne** inaktiválásához. Amikor a funkció **Ki**, van kapcsolva, az aktív tekintet régió újból és újból aktiválódik, ameddig a felhasználó a tekintet régióra tekint. (alapértelmezett)

Eye Gaze korlátozása gombok csak Tobii Dynavox alkalmazásokhoz

- **Be** - Válassza a **Be** opciót a **Eye Gaze korlátozása gombok csak Tobii Dynavox alkalmazásokhoz** aktiválására. Amikor a funkció **Be** van kapcsolva, az aktív tekintet régió aktiválódik, a régióhoz társított parancs végre lesz hajtva, és a Tobii Dynavox visszajelzés interakció **csak** a Tobii Dynavox szoftverben és alkalmazásokban jelenik meg.
- **Ki** - Válassza a **Ki** opciót az **Eye Gaze korlátozása gombok csak Tobii Dynavox alkalmazásokhoz** inaktiválására. Amikor a funkció **Ki** van kapcsolva, az aktív tekintet régió aktiválódik, a régióhoz társított parancs végre lesz hajtva, és a Tobii Dynavox visszajelzés interakció **csak** a Tobii Dynavox szoftverben és alkalmazásokban jelenik meg. (alapértelmezett)

4.4.1.2 Tekintet és Kapcsoló beállítások

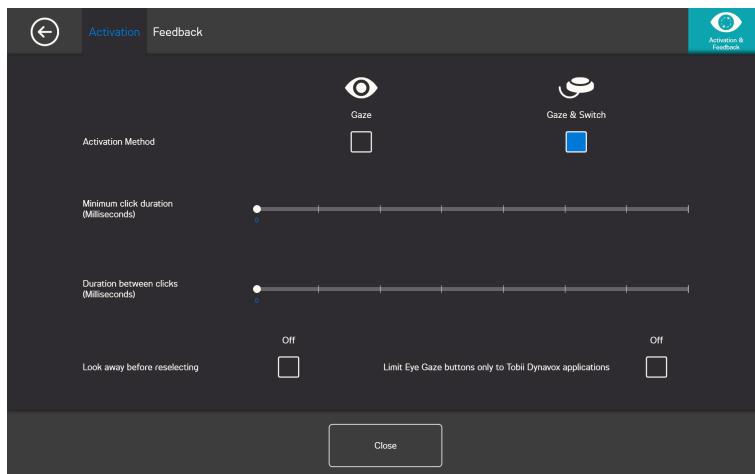

Kattintás minimális időtartama: Az az időtartam, ameddig a felhasználónak lenyomva kell tartania a kapcsolót, mielőtt kiválaszt valamit.

Kattintások közötti időtartam: A „hóltidő”, ameddig a Windows Control várakozik, mielőtt további bevitelváltást tenne lehetővé.

Nézzon félre, mielőtt újra kijelölne.


- **Be** - Válassza a **Be** opciót a **Nézzon félre, mielőtt újra kijelölne** aktiválására. Amikor a funkció **Be**, van kapcsolva, a felhasználónak először félre kell néznie az aktív tekintet régiójából, hogy újból aktiválhassa ugyanazt a tekintet régiót.
- **Ki** - Válassza a **Ki** opciót a **Nézzon félre, mielőtt újra kijelölne** inaktiválásához. Amikor a funkció **Ki**, van kapcsolva, az aktív tekintet régió újból és újból aktiválódik, ameddig a felhasználó a tekintet régióra tekint. (alapértelmezett)

Eye Gaze korlátozása gombok csak Tobii Dynavox alkalmazásokhoz

- **Be** - Válassza a **Be** opciót a **Eye Gaze korlátozása gombok csak Tobii Dynavox alkalmazásokhoz** aktiválására. Amikor a funkció **Be** van kapcsolva, az aktív tekintet régió aktiválódik, a régióhoz társított parancs végre lesz hajtva, és a Tobii Dynavox visszajelzés interakció **csak** a Tobii Dynavox szoftverben és alkalmazásokban jelenik meg.

- **Ki** - Válassza a **Ki** opciót az **Eye Gaze korlátozása gombok csak Tobii Dynavox alkalmazásokhoz** inaktíválására. Amikor a funkció **Ki** van kapcsolva, az aktív tekintet régió aktiválódik, a régióhoz társított parancs végre lesz hajtva, és a Tobii Dynavox visszajelzés interakció csak a Tobii Dynavox szoftverben és alkalmazásokban jelenik meg. (alapértelmezett)


4.4.2 A Visszajelzés fül

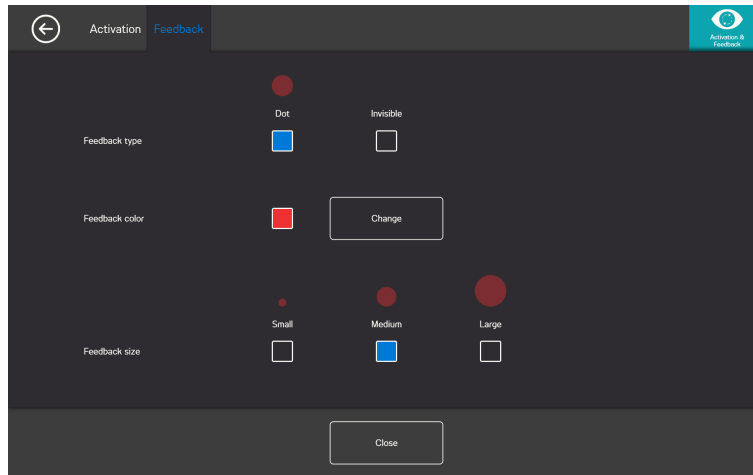

Visszajelzés típusa:

- **Óra** - A vizuális visszajelzés az óra, mely feltöltődik a megnevezett Gomb Várakozási Idő tartam alatt. Amint az óra teljesen felelt, a Feladat kivitelezésre kerül
- **Pont** - A vizuális visszajelzés zsugorodó pont Tekintet használók esetén, illetve statikus pont Kapcsoló használók esetén, a Feladat végrehajtásakor.
- **Láthatatlan** - Nincs vizuális visszajelzés a képernyőn a Feladat végrehajtásakor.

Visszajelzés színe: Válassza a **Módosítás** gombot szín választásához a visszajelzés ponthoz. A rendelkezésre álló színekhez, lásd *Ábra 4.1 Rendelkezésre álló színek, oldal 35.*

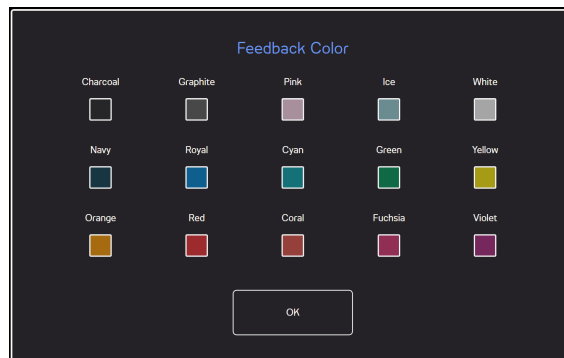

Ábra 4.1 Rendelkezésre álló színek


Visszajelzés mérete: A kiválasztott visszajelzés típus visszajelzési méretét három (3) különböző értékre lehet állítani.

- **Kicsi**
- **Közepes**
- **Nagy**

4.5 Feladatsáv




4.5.1 A Feladatsáv fül

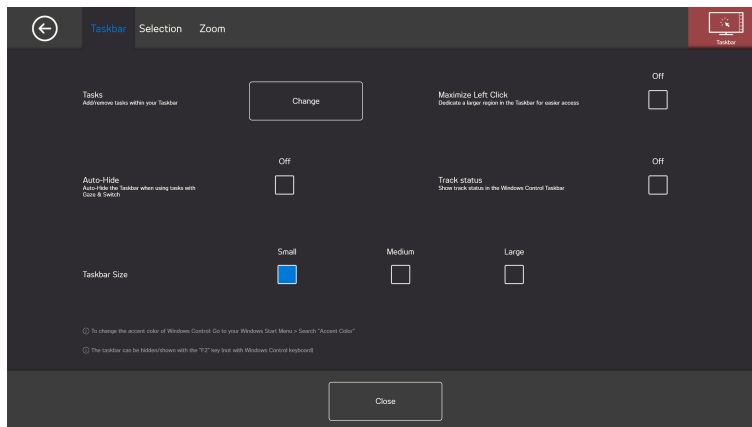

4.5.1.1 Feladatok

Válassza a **Módosítás** gombot az előugró ablak elérésére, amelyben feladatok adhatók hozzá vagy törölhetők a Feladatsávról.

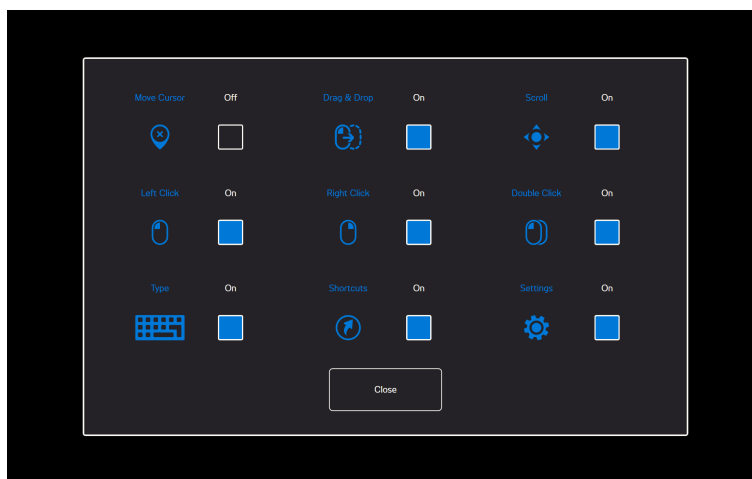

Válassza ki a használandó feladatokat a Feladatsávon. A feladatokra vonatkozó további információkért, lásd 3.4 Szokásos Feladatok, oldal 13.



Tudnia kell, hogy minél több feladatot használ a Feladatsávon, annál nehezebbé válhat kisebb képernyőkön azok kiválasztása.

Váltsa a Be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet a **Be** lehetőségre minden Feladat tekintetében, hogy a Feladatsávon használhassa.

Váltsa a Be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet a **Ki** lehetőségre minden Feladat tekintetében, hogy használatát és a Feladatsávban való láthatóságát letiltja.

4.5.1.2 Bal kattintás nagy méretűvé tétele

A Bal kattintás nagy méretűvé tétele lehetőség aktiválása nagymértékben kiterjeszti a Bal kattintás feladat aktív területét, s így sokkal könnyebb kiválasztani a Bal kattintás feladatot.

Használja a **Bal kattintás nagy méretűvé tétele** lehetőséget a Bal kattintás kiterjesztéséhez és hangsúlyozásához a Feladatsávon. Ha a **Ki** lehetőségre van váltva, akkor az összes kiválasztott Feladat egyenletesen helyezkedik el a Feladatsáv mentén. Ha

a **Be** lehetőségre váltottak, akkor az összes Feladat a Bal kattintáson kívül megtartja eredeti / kis méretét és a Bal kattintás feladat kitölti a megmaradt teret a Feladatsávon.

4.5.1.3 Automatikus elrejtés

Automatikusan elrejt a Feladatsávot. Minden Rögzített feladathoz és a Kapcsoló aktiválási módjának minden feladatához elérhető.

Váltsa a Be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet **Be** opcióra az Automatikus elrejtés engedélyezésére.

Váltsa a Be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet **Ki** beállításra az Automatikus elrejtés letiltására.

- **Be** - Válassza a **Be** opciót az **Automatikus elrejtés** aktiválására. Amikor a funkció **Be**, van kapcsolva, az .
- **Ki** - Válassza a **Ki** opciót az **Automatikus elrejtés** inaktiválására. Amikor a funkció **Ki**, van kapcsolva, az aktív tekintet régió újból és újból aktiválódik, ameddig a felhasználó a tekintet régióra tekint. (alapértelmezett)



A billentyűzet (nem a Windows Control billentyűzet) F2 billentyűjével manuális elrejtheti/megjelenítheti a feladatsávot.

4.5.1.4 Követési állapot

Megjeleníti a követési állapotot a Windows Control Feladatsáv felső részén. Alapértelmezés szerint a megjelenő követési állapot kikapcsolt.

Váltsa a Be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet **Be** opcióra a Követési állapot megjelenítésére.

Váltsa a Be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet **Ki** opcióra a Követési állapot elrejtésére.


4.5.1.5 Feladatsáv mérete

A Feladatsáv méreténél a Feladatsáv mérete három (3) méret között váltakozhat:

Kicsi	Közepes	Nagy

Nagy méret választásakor a Feladatsávhoz a Feladat körüli aktív terület kiterjed, hogy a felhasználó könnyebben választhassa ki a Feladatot. Az aktuális aktív terület kiterjed a képernyőn kívül, a Feladatok ikonja pedig mindig középen van az aktív területben.

4.5.2 A Kiválasztás Fül

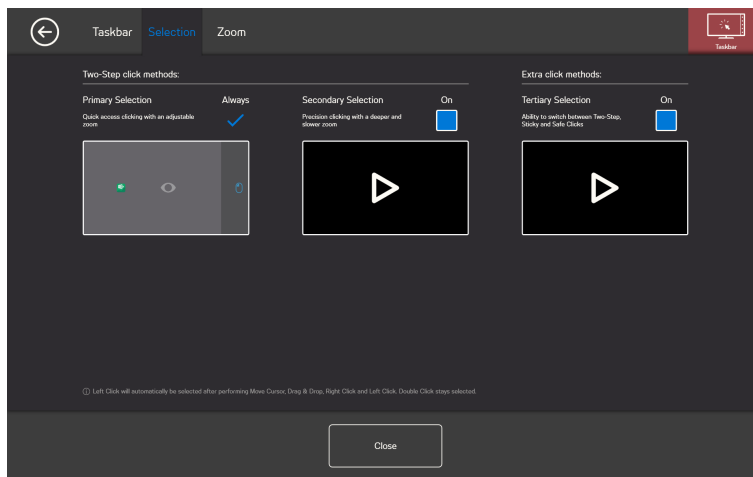

4.5.2.1 Elsődleges kiválasztás

Az Elsődleges kiválasztás mindig aktívva van, és nem lehet inaktíválni.

4.5.2.2 Másodlagos kiválasztás

Alapértelmezetten a Másodlagos kiválasztás mindig **Ki** opcióra van beállítva. Ha **Be** opcióra váltják, a Másodlagos kiválasztás elérhetővé válik.

4.5.2.3 Harmadlagos kiválasztás

Alapértelmezetten a Harmadlagos kiválasztás mindig **Ki** opcióra van beállítva. Ha **Be** opcióra váltják, a Harmadlagos kiválasztás elérhetővé válik. A Harmadlagos kiválasztással elérhetőek a Rögzített és Biztonságos Kattintás feladatok. További információkért lásd 3.5 *Rögzített Feladatok*, oldal 15 és 3.6 *Biztonságos Kattintás*, oldal 16.

4.5.3 A Nagyítás fül



Nagyítási mélység

A nagyítási mélység 8 különböző szintre állítható, s csak rá kell tekinteni az óhajtott helyre a beállítás módosításához. A mélység módosítása azt határozza meg, hogy milyen mélyre hasson a nagyítás a Feladat elvégzése előtt. Minél inkább jobbra van a skálán, annál mélyebbre ható a nagyítás.




Ha a Mélység zéróra van állítva, akkor nagyítás nem történik. Azonnali kattintás lesz Elsődleges Kiválasztás esetén. A Másodlagos Kiválasztás esetén még mindig nagyítás lesz.

Nagyítási sebesség

A Nagyítási sebesség 8 különböző szintre állítható, s csak rá kell tekinteni az óhajtott helyre a beállítás módosításához. A Sebesség módosítása a nagyítás gyorsaságát befolyásolja a feladat elvégzése előtt. Minél inkább jobbra van a skálán, annál gyorsabb a nagyítás.

4.6 Billentyűzet

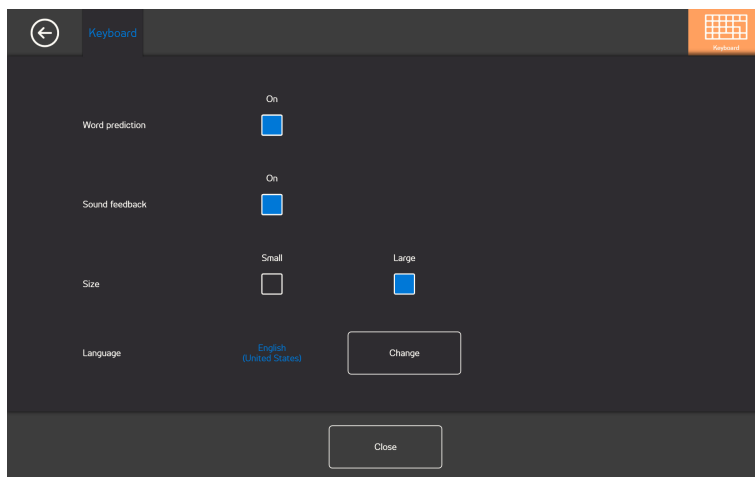

Szó előrejelzés

- **Be** - Válassza a **Be** opciót a Szó előrejelzés aktiválásához, amikor a Tekintet billentyűzetet használja (alapértelmezett)
- **Ki** - Válassza a **Ki** opciót a Szó előrejelzés inaktíválásához, amikor a Tekintet billentyűzetet használja.

Hang visszajelzés

- **Be** - Válassza a **Be** opciót a hang visszajelzés aktiválásához, amikor gombot választ ki a Tekintet billentyűzeten.
- **Ki** - Válassza a **Ki** opciót a hang visszajelzés inaktíválásához, amikor gombot választ ki a Tekintet billentyűzeten.

Méret

- **Kis** - Válassza a Kis opciót kisebb méretű Tekintet billentyűzet használatához, mely a képernyő felénél kevesebb helyet foglal el, lásd *Ábra 4.2 Kis elrendezésű képernyő (alapértelmezett), oldal 39.*
- **Nagy** - Válassza a Nagy opciót nagyobb méretű Tekintet billentyűzet használatához, mely a képernyő felét foglalja el, lásd *Ábra 4.3 Nagy elrendezésű képernyő, oldal 40.*



Ábra 4.2 Kis elrendezésű képernyő (alapértelmezett)



Ábra 4.3 Nagy elrendezésű képernyő

Nyelv

A kiválasztott nyelvű billentyűzet elrendezés jelenik meg. Válassza a **Módosítás** gombot a billentyűzet egyéb nyelven történő elrendezésére való módosításhoz Több különböző nyelven áll billentyűzet elrendezés rendelkezése.

5 Virtual Remote

5.1 A Virtual Remote áttekintése



Ábra 5.1 A Virtual Remote áttekintése

A Virtual Remote két területre van felosztva:

- A Virtual Remote menü, további információkért lásd 5.1.1 *Virtual Remote menü*, oldal 41.
- Az Aktív távirányító, további információkért lásd 5.1.2 *Az Aktív távirányító*, oldal 42.

5.1.1 Virtual Remote menü




Ábra 5.2 A Virtual Remote menü

A Virtual Remote menü ikonjai:

Feladat gomb	Művelet	Leírás
+	Távirányító hozzáadása	Új távirányító hozzáadásához válassza ezt a műveletet, lásd 5.2.4 <i>Távirányító hozzáadása</i> , oldal 44.
i	Információk	Az információs lap megnyitásához válassza ezt a műveletet, lásd 5.2.6 <i>Információk</i> , oldal 60.
<	Bal	Az aktív távirányító bal oldalán látható távirányító aktiválásához válassza ezt a műveletet.
>	Jobb	Az aktív távirányító jobb oldalán látható távirányító aktiválásához válassza ezt a műveletet.
	Szerkesztés mód	Az aktív távirányító Szerkesztés módjához való ugráshoz válassza ezt a műveletet, lásd 5.2.5 <i>Szerkesztés mód</i> , oldal 51.
X	Bezárás/kis méret	A Virtual Remote alkalmazás kis méretűvé tételéhez válassza ezt a műveletet.

5.1.2 Az Aktív távirányító

Mindig az a távirányító az aktív, amelyik a Virtual Remote menü közepén található, lásd *Ábra 5.3 Aktív távirányító*.

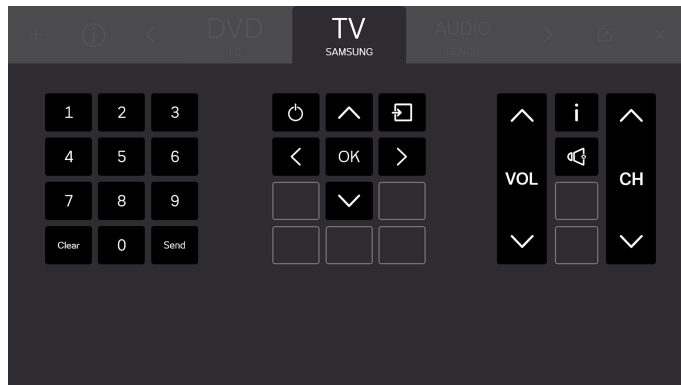


Ábra 5.3 Aktív távirányító



A képen látható minden gomb az aktív távirányító gombja.

Ugyanakkor még legtöbb két (2) választható távirányító nevét is láthatja, egyet-egyet az aktív távirányító mindkét oldalán. A választható távirányítóknak csak a nevét láthatja, a gombjaikat nem, amíg ki nem választja valamelyiket aktív távirányítóként.

5.1.3 A gombok

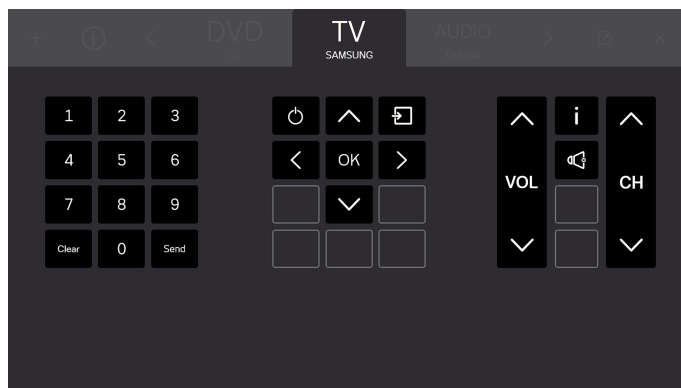


Ábra 5.4 A gombok

A képen látható minden gomb az aktív távirányító gombja. A távirányítónak kétféle (2) gombja van.


- Aktiv gomb , lásd *Ábra 5.5 Aktiv gombok, oldal 43*
- Inaktív gomb , lásd *Ábra 5.6 Inaktív gombok, oldal 43*



A gombok száma és a gombok funkciói annak függvényében különbözik, hogy a felhasználó milyen típusú rendszert kíván irányítani.

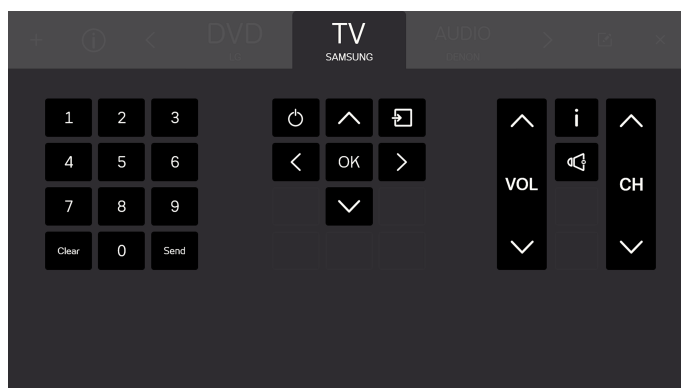

Ábra 5.5 Aktív gombok

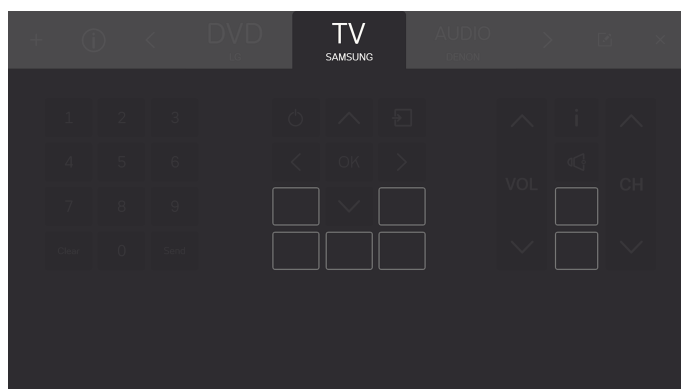

Ábra 5.6 Inaktív gombok

5.2 A Tobii Dynavox Virtual Remote használata


A Tobii Dynavox Virtual Remote lehetővé teszi, hogy a felhasználó a készülékről irányíthassa a TV, DVD és Audio rendszert.



A Virtual Remote összes funkciója érintéssel és egérrel is aktiválható, ami megkönnyíti, hogy a gondozó vagy az aszisztens szükség esetén segítsen a felhasználónak.

5.2.1 Első indításkor

A felhasználó egy rövid útmutatóból ismerheti meg a Virtual Remote szoftver elrendezését. Egyszerűen kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

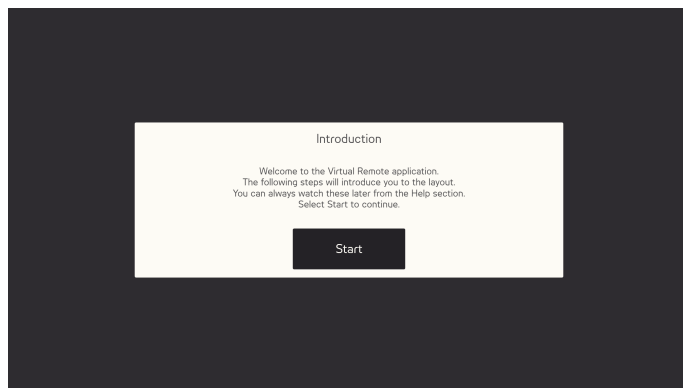

Ábra 5.7 A Virtual Remote Bevezető képernyője.

5.2.2 Másik aktív távirányító kiválasztása

Másik aktív távirányító kiválasztásához:

- Válassza ki az aktív távirányító bal vagy jobb oldalán látható nevek egyikét.
- vagy használja a < és > gombot a rendelkezésre álló távirányók közötti görgetéshez.



Mindig az a távirányító az aktív, amelyik a Virtual Remote menü közepén található.


5.2.3 A távirányító gombjainak használata

Válassza ki a gombot, amelyet használni kíván, hogy elküldje a jelet a készülékhez. A hangerőgombok általában úgy vannak beállítva, hogy folyamatos jelet küldjenek, amíg a gomb ki van választva. További információk tekintetében, lásd 5.2.5.3.1 *Jelhosszúság, oldal 55*.

Ha 9-nél nagyobb számot akar begépelni (pl. több számjegyű számot), az alábbiak szerint járjon el.

9-nél nagyobb szám begépelése lépéssorozat

1. Válassza ki az összes elküldendő számot abban a sorrendben, amelyben el kell küldenie. Az összes kiválasztott szám megjelenik a távirányító számgombjai alatti fehér négyzetben.

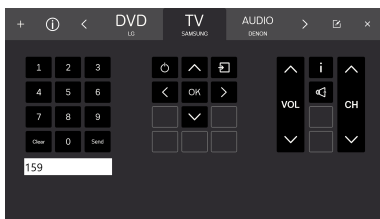

2. A jeleknek a készülékhez való elküldésére válassza a **Küldés** gombot, illetve az összes kiválasztott szám törléséhez a **Törlés** gombot.

5.2.4 Távirányító hozzáadása




Új távirányítót két (2) módon lehet hozzáadni.

5.2.4.1 Előre programozott távirányító hozzáadása

Új előre programozott távirányító hozzáadásához az alábbiak szerint járjon el:


Előre programozott távirányító hozzáadása lépéssorozat

1. Válassza ki a menüből a  gombot.
2. Válassza az Előre programozott gombot

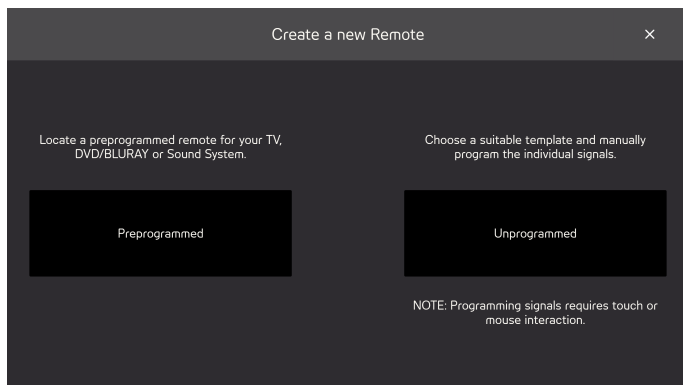

3. Válassza ki az előre programozott távirányító típusát


- TV
- DVD/BLURAY
- AUDIO

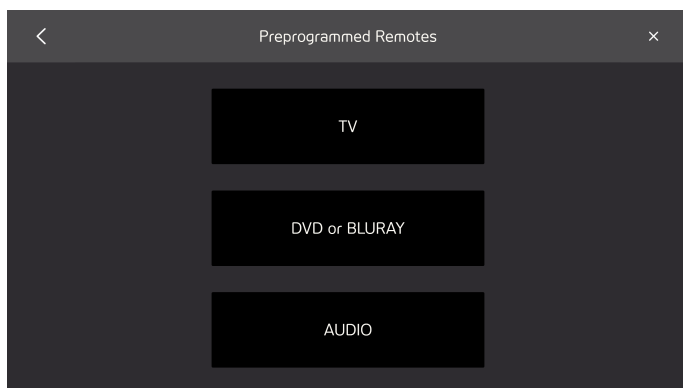


4. Válassza ki a listáról a márkát



Ha nem találja meg a márkát, válassza az **Egyéb** beállítást, további információkért lásd 5.2.4.1.1 *Egyéb távirányítók, oldal 47*

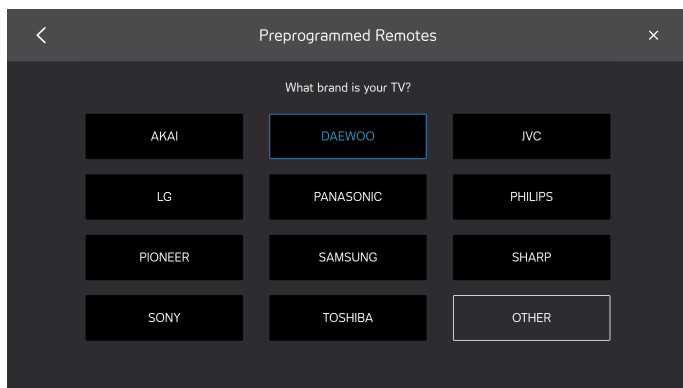


5. Amikor kiválaszt egy márkát, egy előugró ablak jelenik meg, amely tájékoztat arról, hogy hány előre programozott távirányító közül választhat.

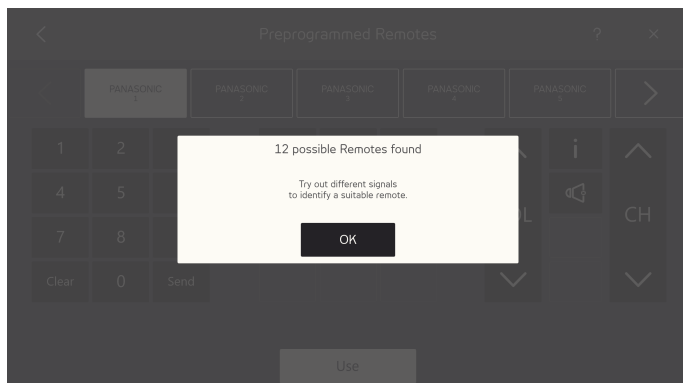

Válassza ki az **OK** gombot.

6. Válasszon egy távirányítót

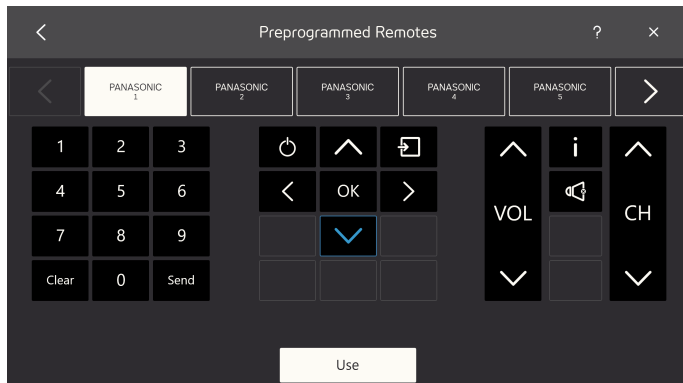


7. Próbáljon ki különböző jeleket a kiválasztott távirányítón, hogy azonosítja a megfelelő távirányítót.
8. Ismételje meg a 6. és 7. lépést, amíg meg nem találja a legmegfelelőbb távirányítót.




Használja a < és > gombot a rendelkezésre álló távirányítók közötti görgetéshez.

9. Válassza ki a legmegfelelőbb távirányítót.
10. Válassza a **Használat** gombot.

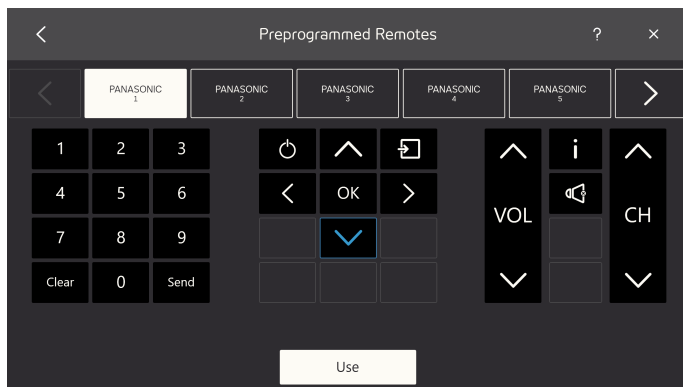

11. A kiválasztott távirányítót a program átmásolja a választható távirányítók közé.

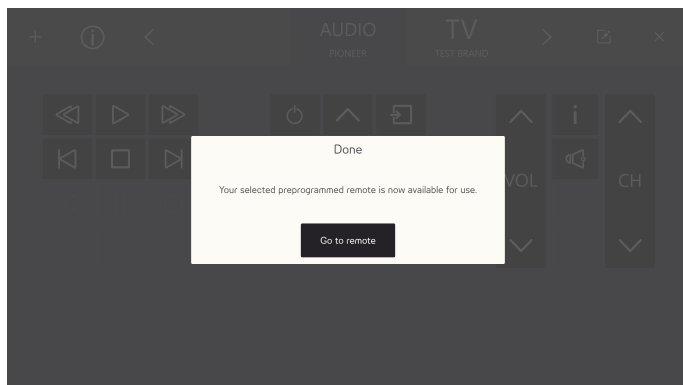


A művelet befejezéséhez válassza az **Ugrás a távirányítóhoz** gombot.

5.2.4.1.1 Egyéb távirányítók


Egyéb távirányítók hozzáadásához az alábbiak szerint járjon el:

Egyéb távirányító hozzáadása lépéssorozat


1. Kövesse a lépéssorozat 1. — 3. lépését: *Előre programozott távirányító hozzáadása lépéssorozat, oldal 45.*
2. Válassza az **Egyéb** gombot.
3. Gépelje be a szövegmezőbe a márkanevet.

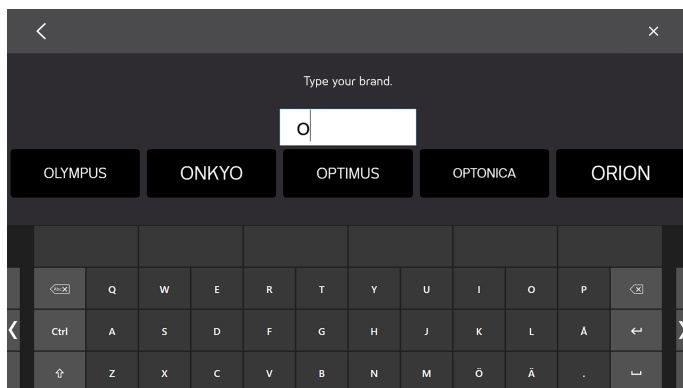


A keresési eredmények körének szűkítéséhez gépeljen be több karaktert.

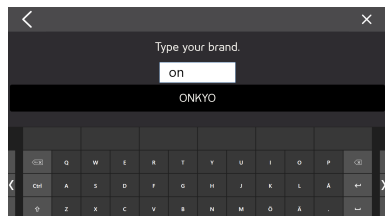

4. Válassza ki a márkát.

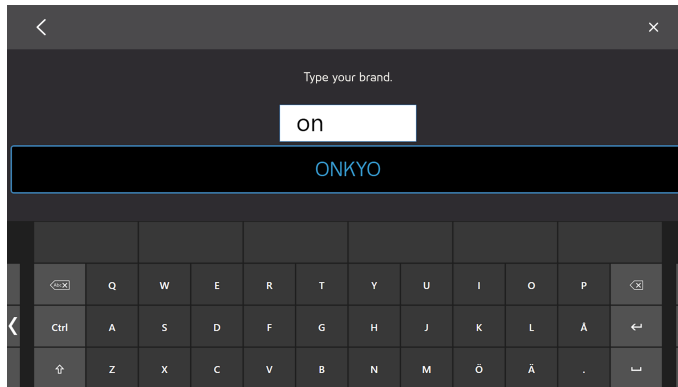


5. Amikor kiválaszt egy márkát, egy előugró ablak jelenik meg, amely tájékoztat arról, hogy hány előre programozott távirányító közül választhat.

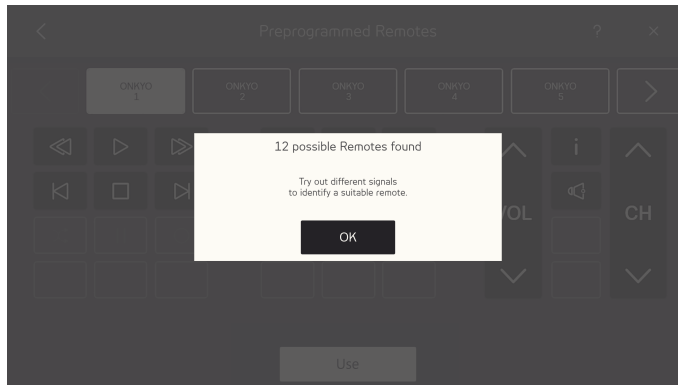

Válassza ki az **OK** gombot.

6. Válasszon egy távirányítót

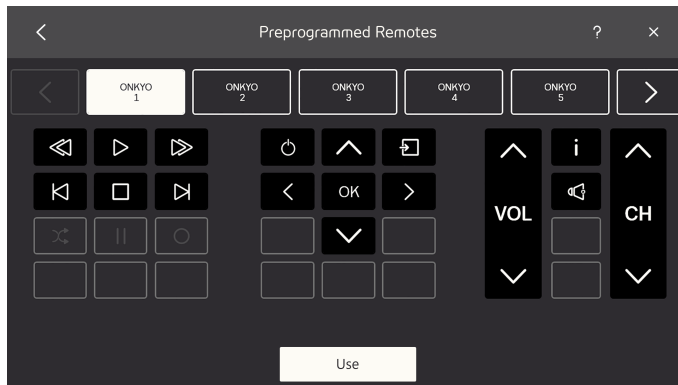


7. Próbáljon ki különböző jeleket a kiválasztott távirányítón, hogy azonosítsa a megfelelő távirányítót.
8. Ismételje meg a 6. és 7. lépést, amíg meg nem találja a lehető legjobb távirányítót.




Használja a < és > gombot a rendelkezésre álló távirányítók közötti görgetéshez.

9. Válassza ki a legmegfelelőbb távirányítót.

10. Válassza a **Használat** gombot.

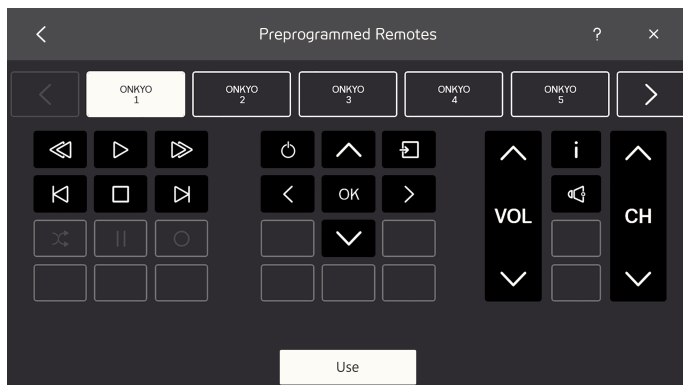

11. A kiválasztott távirányítót a program átmásolja a választható távirányítók közé.

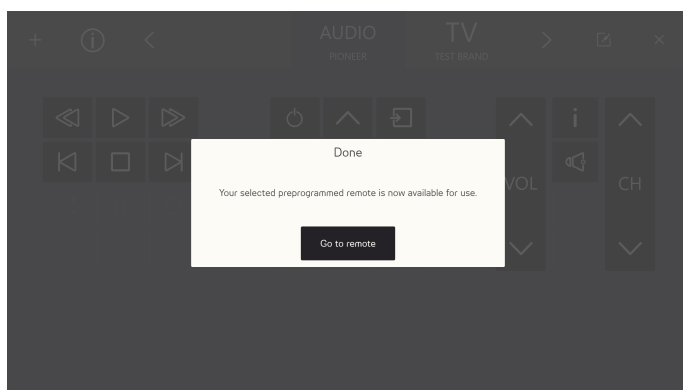


A művelet befejezéséhez válassza az **Ugrás a távirányítóhoz** gombot.

5.2.4.2 Programozatlan távirányító hozzáadása

Új programozatlan távirányító hozzáadásához az alábbiak szerint járjon el:


Programozatlan távirányító hozzáadása lépéssorozat

1. Válassza ki a menüből a  gombot.
2. Válassza a Programozatlan gombot

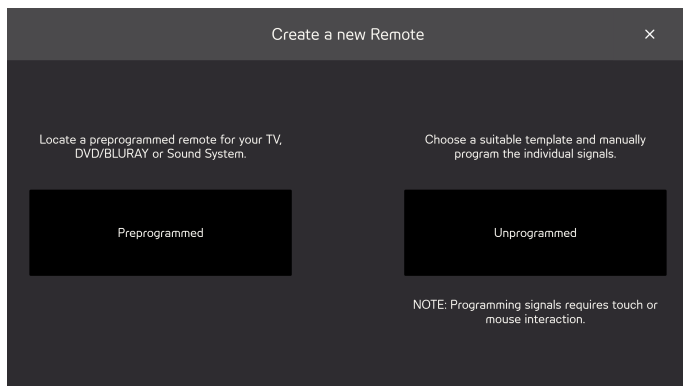


3. Válassza ki a programozatlan távirányító típusát
 - TV
 - AUDIO

- KÁBELDEKÓDER
- DVD vagy BLURAY
- ÜRES SABLON

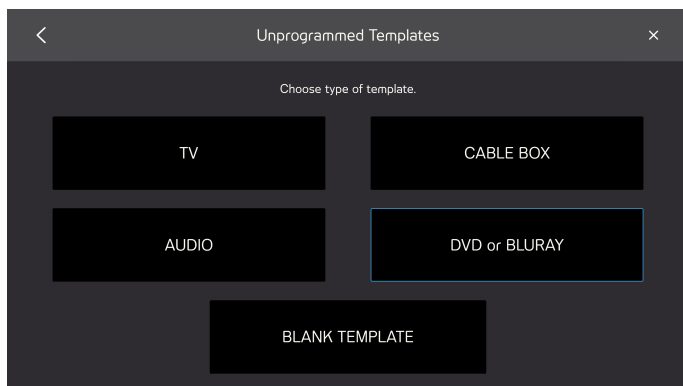


4. Válasszon egy programozandó gombot.

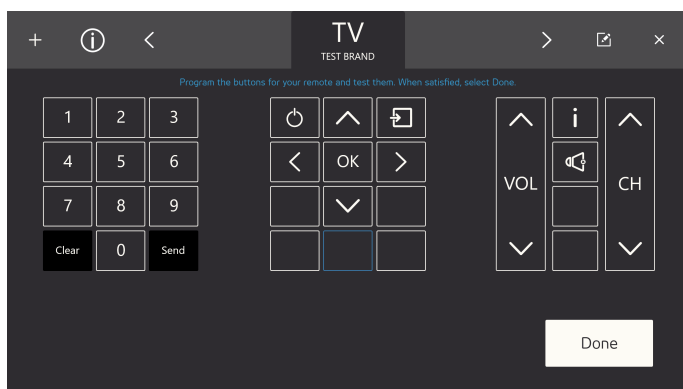


A választható ikonok annak függvényében különböznek, hogy a 3. lépésben milyen típusú távirányító volt kiválasztva.

5. Válasszon egy programozandó gombot.
6. Irányítsa a távirányítót a Tobii Dynavox infravörös vevője felé, és nyomja meg azt a gombot a távirányítón, amelyet meg akar jegyeztetni a Virtual Remote alkalmazással.

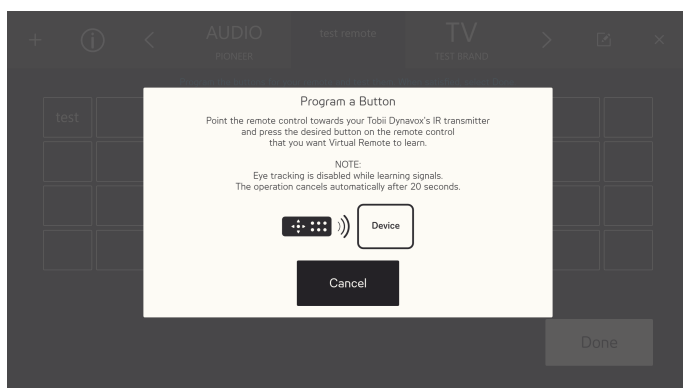

7. Miután a Virtual Remote menti a jelet, megjelenik a **Kész** előugró ablak.

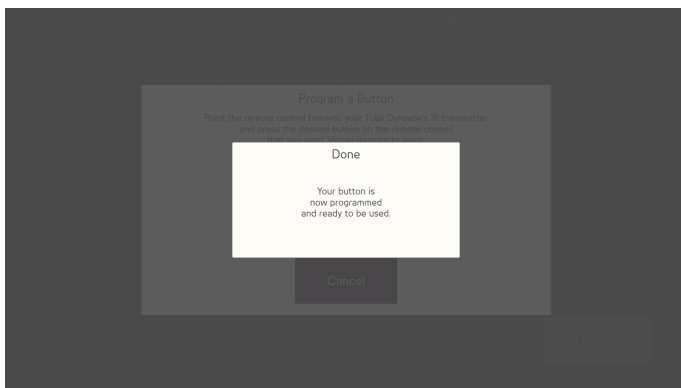

Az előugró ablak néhány másodperc után automatikusan bezáródik.

8. Ismételje meg az 5. — 7. lépést, amíg a távirányító összes szükséges gombját be nem programozta.



Ahhoz, hogy gombokat módosíthasson vagy töröljön a távirányítón, fejezze be a programozást és ugorjon a Szerkesztés módra. A Szerkesztés módra vonatkozó további információkért, lásd *5.2.5 Szerkesztés mód*, *oldal 51*.

9. A véglegesítéshez használja a **Kész** gombot




5.2.5 Szerkesztés mód



A Szerkesztés módban módosításokat hajthat végre a létező távirányítókön. Győződjön meg, hogy a szerkesztetni kívánt távirányító az aktív távirányító. A szerkesztés módra való belépéshez az alábbiak szerint járjon el:

Szerkesztés mód lépéssorozata

1. Válassza a  (Szerkesztés mód) gombot.

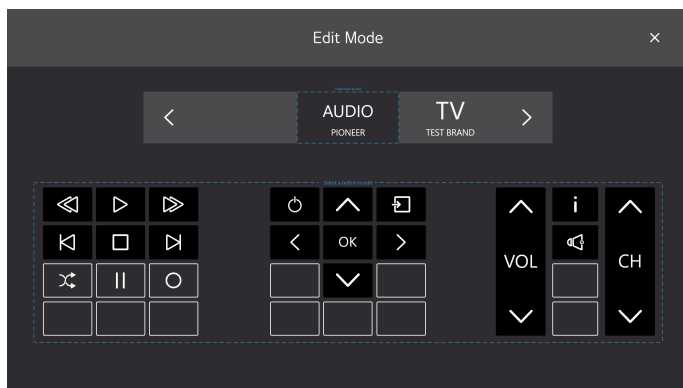


2. Válassza ki, hogy a távirányító melyik részén akar módosításokat végezni. A következő módosítások végezhetők:
 - A távirányító nevének módosítása, lásd 5.2.5.1 *Távirányító nevének módosítása, oldal 52*
 - Távirányító törlése, lásd 5.2.5.2 *Távirányító törlése, oldal 53*
 - Módosítások létező aktív gombon, lásd 5.2.5.3 *Módosítások létező aktív gombon.*
 - Módosítások létező nem programozott gombon, lásd 5.2.5.4 *Módosítások létező nem programozott gombon, oldal 57.*
 - Új gomb hozzáadása üres helyre, lásd 5.2.5.5 *Új gomb hozzáadása üres helyre, oldal 59*

5.2.5.1 Távirányító nevének módosítása

Távirányító nevének módosításához az alábbiak szerint járjon el:


Távirányító nevének módosítása

1. Válassza a  (Szerkesztés mód) gombot.

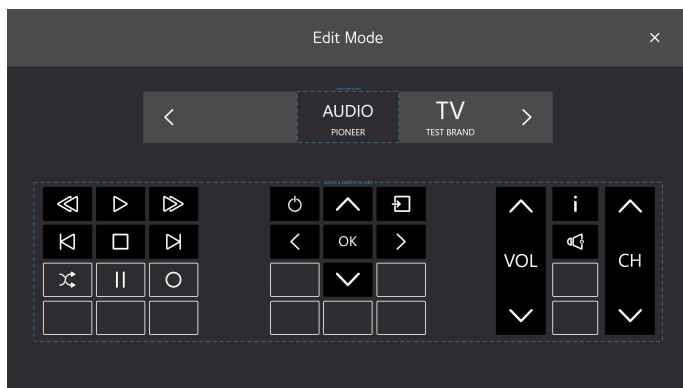

2. Jelölje be az "Itt lehet szerkeszteni" négyzetet, amelyben a távirányító neve található.


3. Válassza az **Átfeliratozás** gombot.

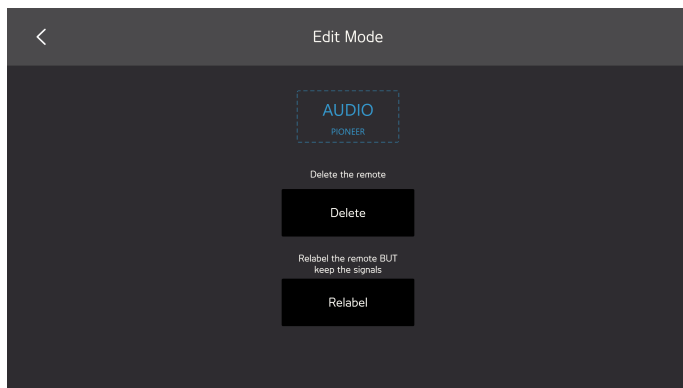

4. Gépelje be az új feliratot.



Minél rövidebb nevet használjon.

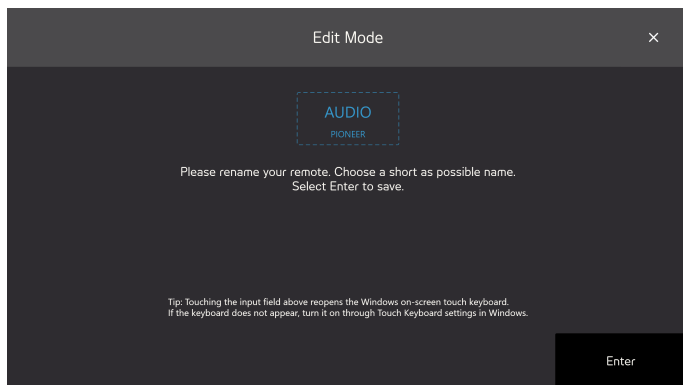


5. Az átfeliratozás befejezéséhez válassza a billentyűzet **Enter** billentyűjét.
6. A Szerkesztés módból való kilépéshez válassza az  ikont.

5.2.5.2 Távirányító törlése


Távirányító törléséhez az alábbiak szerint járjon el:

Távírányító törlése lépés lista


1. Válassza a  (Szerkesztés mód) gombot.

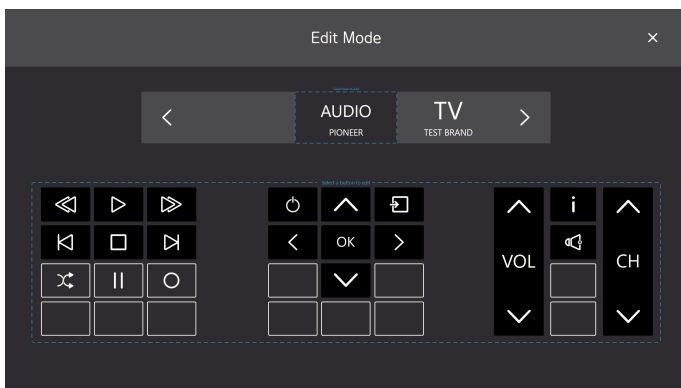

2. Jelölje be az "Itt lehet szerkeszteni" négyzetet, amelyben a távirányító neve található.
3. Válassza a **Törlés** gombot.

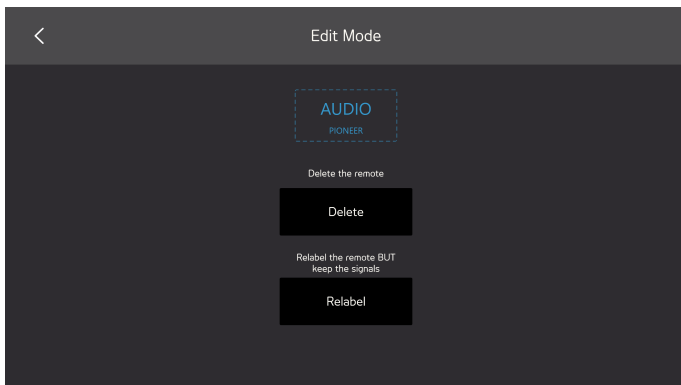

4. Az alábbiak közül választhat:
 - **Igen** a törléshez
 - **Nem** a visszavonáshoz

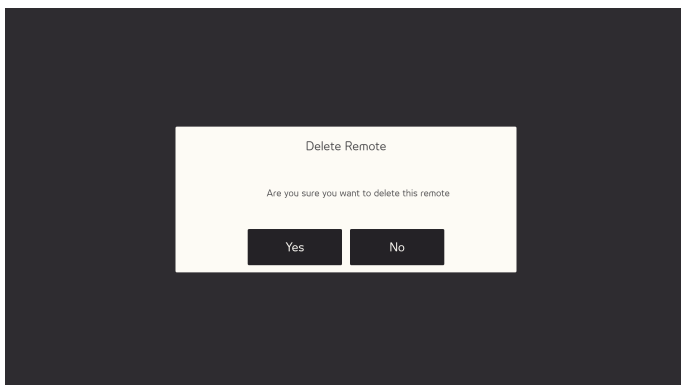


5. A Szerkesztés módból való kilépéshez válassza az  ikont.

5.2.5.3 Módosítások létező aktív gombon


Létező aktív gombon végzendő módosításokhoz az alábbiak szerint járjon el:

Módosítások létező aktív gombon lépéssorozat

1. Válassza a  (Szerkesztés mód) gombot.

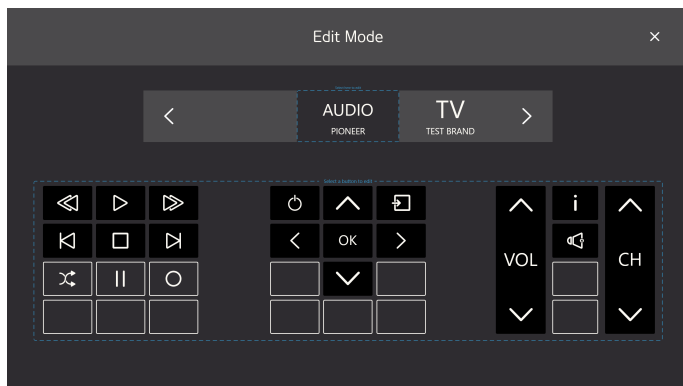

2. Válasszon ki egy fekete háttérű és ikont vagy szöveget tartalmazó gombot, pl. , a "Módosítandó gomb kiválasztása" négyzetben, amelyben a távirányító gombjai találhatók.
3. Válassza ki az alábbi műveletek egyikét:
 - Jelhosszúság, lásd 5.2.5.3.1 Jelhosszúság.
 - Új jel, lásd 5.2.5.3.2 Új jel, oldal 56
 - Szöveg módosítása, lásd 5.2.5.3.3 Szöveg módosítása, oldal 57
 - Ikon módosítása, lásd 5.2.5.3.4 Ikon módosítása, oldal 57
 - A Törlés gomb a gombon tárolt összes adatot törli.

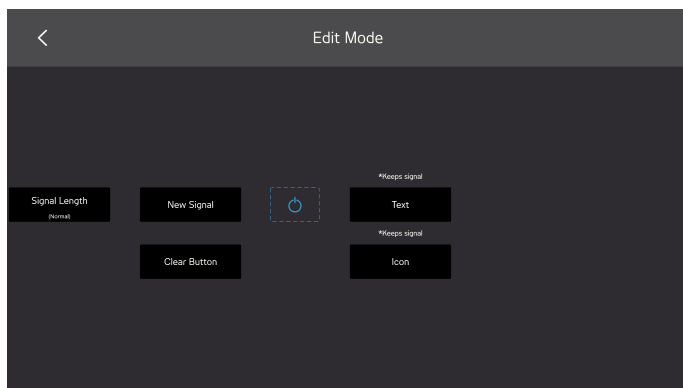

4. A Szerkesztés módból való kilépéshez válassza az  ikont.

5.2.5.3.1 Jelhosszúság


Annak érdekében, hogy a vevőegység megértse a Virtual Remote alkalmazásról küldött jelet, lehet, hogy módosítania kell a jelhosszúságot. A jelhosszúságot akkor is be kell állítani, ha azt szeretné, hogy egy gomb folyamatosan küldje a jelet, amíg az illető gomb ki van választva.

Válasszon egyet (1) az alábbi lehetőséget közül:

- Normál — rövid sorozatban küldi az infravörös jelet.
- Hosszú — egy (1) másodperc alatt küldi az infravörös jelet..
- Extra hosszú — két (2) másodperc alatt küldi az infravörös jelet.
- Folyamatos — addig küldi a jelet, amíg a gomb ki van választva..



Ez például a hangerőgombra jellemző beállítás

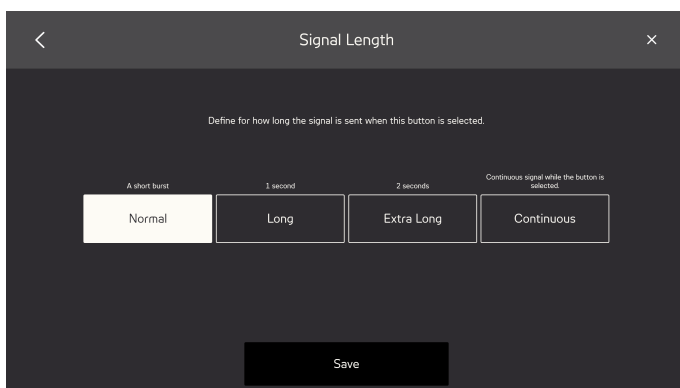


5.2.5.3.2 Új jel


Új jel programozására a gombhoz az alábbiak szerint járjon el:

Új jel lépéssorozat

1. Irányítsa a távirányítót a Tobii Dynavox infravörös vevője felé, és nyomja meg azt a gombot a távirányítón, amelyet meg akar jegyeztetni a Virtual Remote alkalmazással.

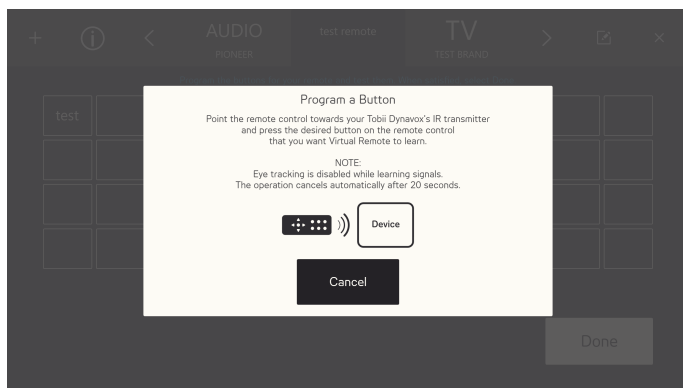

2. Miután a Virtual Remote menti a jelet, megjelenik a **Kész** előugró ablak.

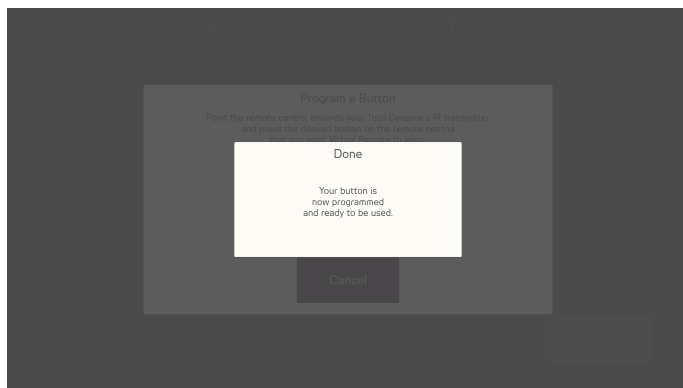


Az előugró ablak néhány másodperc után automatikusan bezáródik.

5.2.5.3.3 Szöveg módosítása

Szöveg módosításához az alábbiak szerint járjon el:

Szöveg módosítása lépéssorozat

1. Gépelje be a szöveget, amelynek meg kell jelennie a gombon.

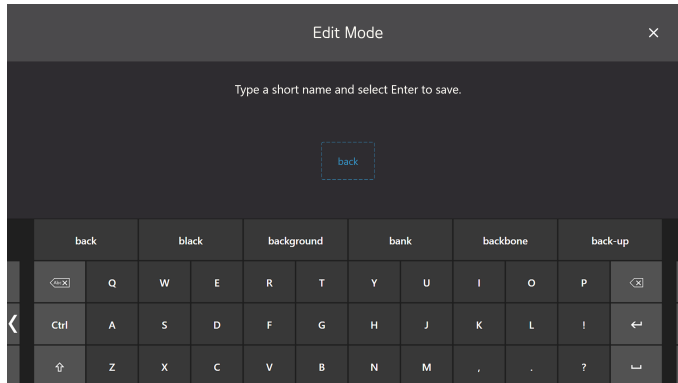


2. A szöveg elfogadásához válassza a billentyűzet Enter/Return billentyűjét.

5.2.5.3.4 Ikon módosítása

Ikon módosításához az alábbiak szerint járjon el:

1. Válasszon ki egy választható ikont.

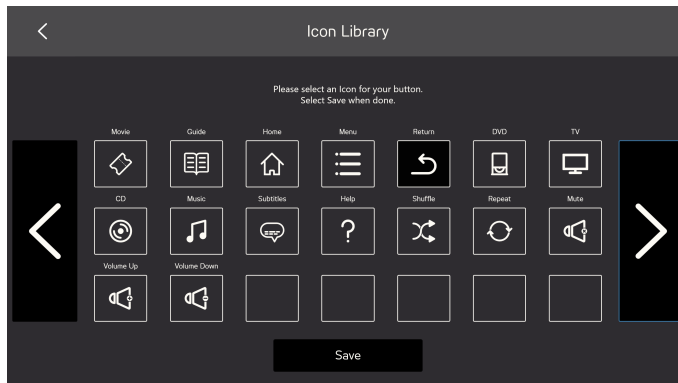


2. Az ikon elfogadásához válassza a **Mentés** gombot.

5.2.5.4 Módosítások létező nem programozott gombon


Létező nem programozott gombon végzendő módosításokhoz az alábbiak szerint járjon el:

Módosítások létező nem programozott gombon lépéssorozat

1. Válassza a  (Szerkesztés mód) gombot.

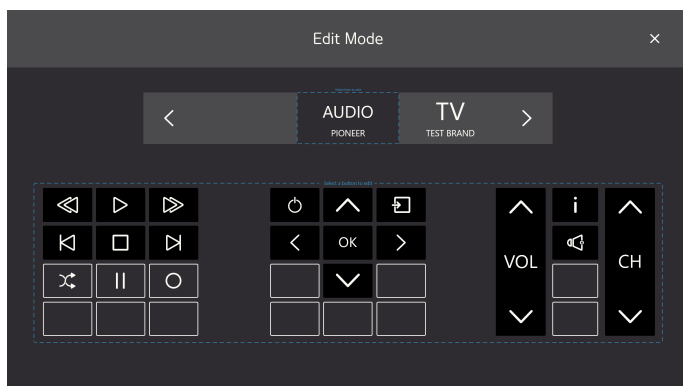

2. Válasszon ki egy szürke háttérű és ikont vagy szöveget tartalmazó gombot, pl. , a "Módosítandó gomb kiválasztása" négyzetben, amelyben a távirányító gombjai található.
3. Válassza ki az alábbi műveletek egyikét:
 - Programozás, lásd 5.2.5.4.1 Programozás, oldal 58
 - Szöveg módosítása, lásd 5.2.5.3.3 Szöveg módosítása, oldal 57
 - Ikon módosítása, lásd 5.2.5.3.4 Ikon módosítása, oldal 57
 - A Törlés gomb a gombon tárolt összes adatot törli.

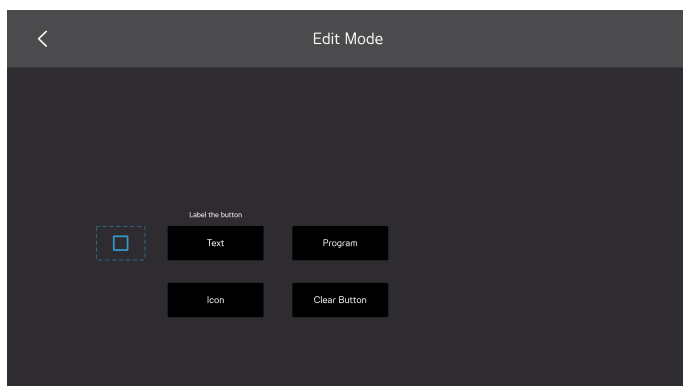


4. A Szerkesztés módból való kilépéshez válassza az  ikont.

5.2.5.4.1 Programozás


Jel programozására a gombhoz az alábbiak szerint járjon el:

Programozás lépéssorozata

1. Irányítsa a távirányítót a Tobii Dynavox infravörös vevője felé, és nyomja meg azt a gombot a távirányítón, amelyet meg akar jegyeztetni a Virtual Remote alkalmazással.

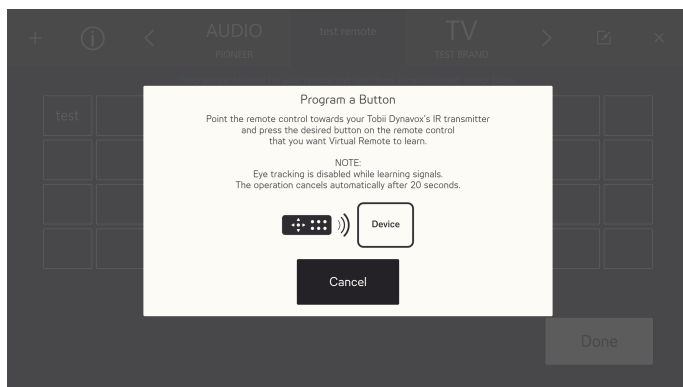

2. Miután a Virtual Remote menti a jelet, megjelenik a **Kész** előugró ablak.

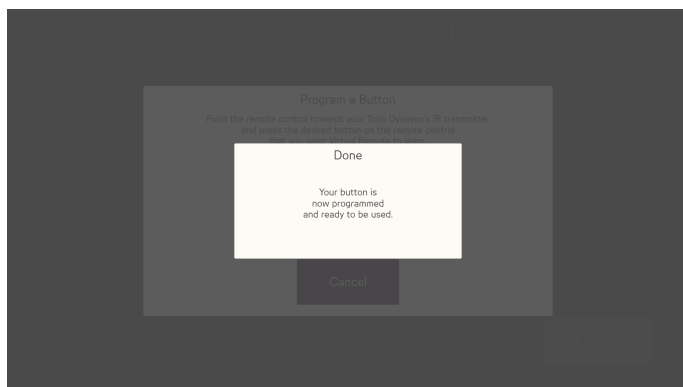


Az előugró ablak néhány másodperc után automatikusan bezáródik.

5.2.5.5 Új gomb hozzáadása üres helyre


Új gomb üres helyre való hozzáadásához az alábbiak szerint járjon el:

Új gomb hozzáadása üres helyre lépéssorozata

1. Válassza a  (Szerkesztés mód) gombot.

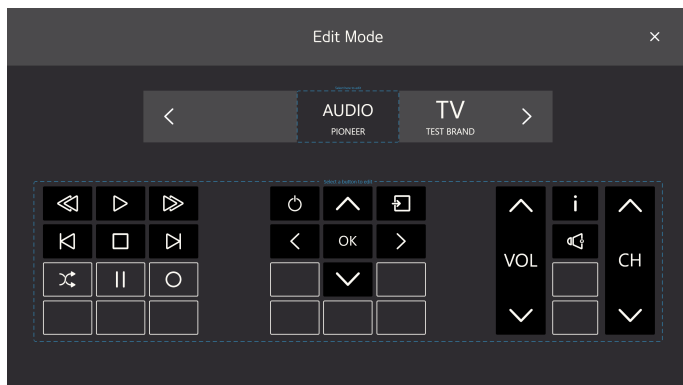

2. Válasszon ki egy szürke háttérű és üres gombot, pl. , a "Módosítandó gomb kiválasztása" négyzetben, amelyben a távirányító gombai találhatóak.
3. Válassza ki az alábbi műveletek egyikét:
 - Szöveg módosítása, lásd 5.2.5.3.3 Szöveg módosítása, oldal 57
 - Ikon módosítása, lásd 5.2.5.3.4 Ikon módosítása, oldal 57

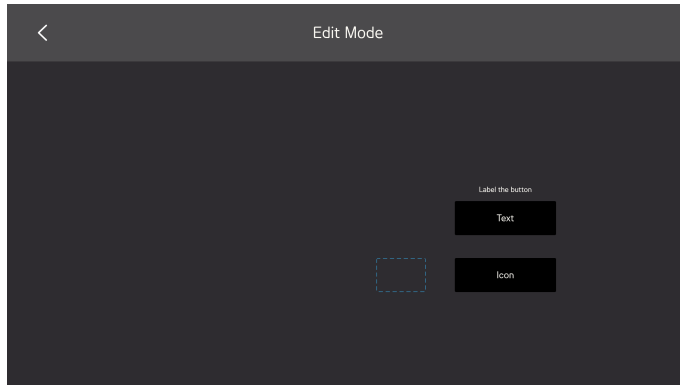


4. A Szerkesztés módból való kilépéshez válassza az  ikont.


5.2.6 Információk



Az információs lapon megtalálja mind a hardverrel, mind a szoftver különböző részeivel kapcsolatos összes verzióadatot.

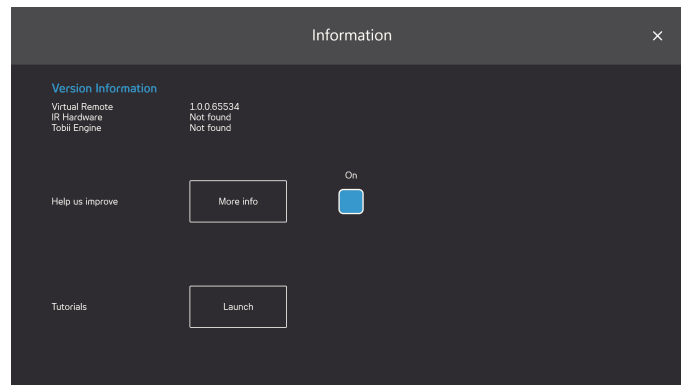

Segítségnyújtás a fejlesztéshez: Segíthet a Tobii Dynavox cégnek a szoftver fejlesztésében, ha a Be-/kikapcsolás jelölőnégyzetet **Bekapcsolás** lehetőségre váltja. A További információk gomb megnyomásával megnyithatja a szoftverrel kapcsolatos információkat tartalmazó oldalt. További információk tekintetében, lásd *Ábra 5.8 Adatgyűjtés, oldal 61*.

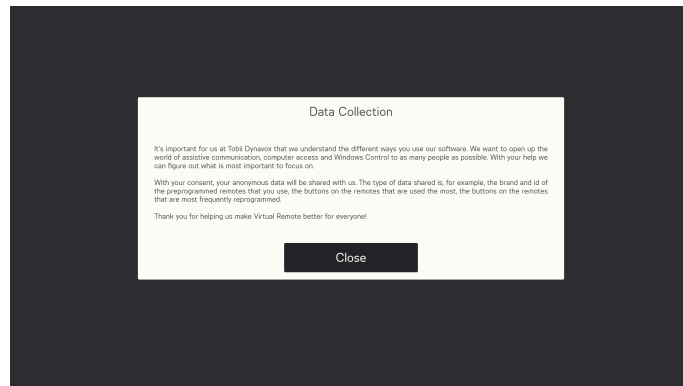

Ábra 5.8 Adatgyűjtés

Oktatóanyagok: A Virtual Remote oktatóanyagot is el tudja indítani, ha a **Indítás** gombot választja.

Szerzői jog ©Tobii AB (publ). Nem minden termék és szolgáltatás kapható minden helyi piacon. A specifikációk előzetes értesítés nélküli módosítások tárgyát képezik. Minden kereskedelmi védjegy tulajdonosának tulajdonát képezi.

Támogatás Tobii Dynavox készülékéhez

Online segítségnyújtás igénybevétele

Lásd a termékspecifikus Támogatás oldalt Tobii Dynavox készülékét illetően. Naprakész információt szolgáltat a termékkel kapcsolatos ötletek és fortélyok tekintetében. Támogatási oldalaink online a következő címeken találhatóak: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kapcsolatfelvétel kereskedelmi képviselőjével, illetve viszonteladójával

Kérdéseivel és problémáival terméke kapcsán forduljon a Tobii Dynavox kereskedelmi képviselőhöz, illetve viszonteladóhoz segítségnyújtásért. Ők ismerik legjobban készüléke személyre szabott konfigurációját és segíthetnek legjobban önnek ötletekkel és a termékre vonatkozó képzéssel. A kapcsolati adatok eléréséhez látogasson el a www.TobiiDynavox.com/contact oldalra