

Informações sobre a recolha do TD Navio

Preparação

Este documento descreve como se preparar para a reparação no âmbito da campanha de recolha do seu TD Navio Midi ou TD Navio Maxi. Siga as instruções para fazer uma cópia de segurança do seu dispositivo e dos dados das aplicações de comunicação, proteger as suas informações pessoais e preparar opções alternativas de comunicação.

Depois de concluir os passos descritos na secção «Preparação», avance para *Iniciar o processo de reparação*, página 8

Se precisar de ajuda, contacte o Apoio ao Cliente. Sabemos que isto requer tempo e esforço, e estamos aqui para ajudar.

AVISO

Evite a perda de dados

O seu dispositivo poderá ser reiniciado durante o processo de reparação. No caso de uma reinicialização, todos os dados pessoais e definições do dispositivo serão apagados. É de responsabilidade do utilizador fazer uma cópia de segurança dos dados do dispositivo antes de o enviar para reparação. Se não o fizer, poderá perder os dados de forma definitiva. Siga cuidadosamente os passos descritos neste documento para fazer uma cópia de segurança do seu dispositivo.

Anote as informações da conta de utilizador

1. Anote o seu ID Apple e a sua palavra-passe.
2. Anote o seu nome de utilizador e palavra-passe do myTobiiDynavox.

Como posso criar uma conta myTobiiDynavox?

Vá a [«Criar uma conta myTobiiDynavox»](#) para criar uma conta myTobiiDynavox.

Faça uma cópia de segurança do seu TD Navio com o iPadOS



As imagens podem ser do iOS, mas as instruções são as mesmas para o iPadOS.

Uma cópia de segurança do dispositivo cria uma cópia das informações do seu dispositivo, incluindo ficheiros pessoais, aplicações, fotografias e definições. O ficheiro de cópia de segurança pode ser utilizado para restaurar o seu dispositivo ao estado em que se encontrava antes de ter sido reiniciado. Para fazer uma cópia de segurança do seu TD Navio, siga as seguintes instruções:

Idioma	Link
Inglês	https://support.apple.com/en-us/108366
Alemão	https://support.apple.com/de-de/108366
Francês	https://support.apple.com/fr-fr/108366
espanhol	https://support.apple.com/es-mx/108366
Holandês	https://support.apple.com/nl-nl/108366
Sueco	https://support.apple.com/sv-se/108366
Norueguês	https://support.apple.com/no-no/108366

Dinamarquês	https://support.apple.com/da-dk/108366
Chinês simplificado	https://support.apple.com/zh-cn/108366
Japonês	https://support.apple.com/ja-jp/108366
Italiano	https://support.apple.com/it-it/108366
Finlandês	https://support.apple.com/fi-fi/108366
Árabe	https://support.apple.com/ar-sa/108366
búlgaro	https://support.apple.com/bg-bg/108366
Polaco	https://support.apple.com/pl-pl/108366
Esloveno	https://support.apple.com/sl-si/108366
Estónio	https://support.apple.com/et-ee/108366
Português	https://support.apple.com/pt-pt/108366
Croata	https://support.apple.com/hr-hr/108366
Islandês	https://support.apple.com/is-is/108366
Hebraico	https://support.apple.com/he-il/108366

Ligue o seu TD Navio ao Wi-Fi



As imagens podem ser do iOS, mas as instruções são as mesmas para o iPadOS.

Para ligar o seu TD Navio ao Wi-Fi, siga estas instruções:

Idioma	Link
Inglês	https://support.apple.com/en-us/111107
Alemão	https://support.apple.com/de-de/111107
Francês	https://support.apple.com/fr-fr/111107
espanhol	https://support.apple.com/es-mx/111107
Holandês	https://support.apple.com/nl-nl/111107
Sueco	https://support.apple.com/sv-se/111107
Norueguês	https://support.apple.com/no-no/111107
Dinamarquês	https://support.apple.com/da-dk/111107
Chinês simplificado	https://support.apple.com/zh-cn/111107
Japonês	https://support.apple.com/ja-jp/111107
Italiano	https://support.apple.com/it-it/111107
Finlandês	https://support.apple.com/fi-fi/111107
Árabe	https://support.apple.com/ar-sa/111107
búlgaro	https://support.apple.com/bg-bg/111107
Polaco	https://support.apple.com/pl-pl/111107
Esloveno	https://support.apple.com/sl-si/111107
Estónio	https://support.apple.com/et-ee/111107
Português	https://support.apple.com/pt-pt/111107

Croata	https://support.apple.com/hr-hr/111107
Islandês	https://support.apple.com/is-is/111107
Hebraico	https://support.apple.com/he-il/111107

Faça uma cópia de segurança da sua conta de utilizador do TD Snap

Voltar ao myTobiiDynavox (recomendado)



1. Selecione o botão **«Editar»**.
2. Selecione o separador **«Utilizador»**.
3. Selecione a seta à direita do utilizador atual.



4. Selecione o botão **«Cópia de segurança»** ao lado do nome do utilizador do qual pretende fazer uma cópia de segurança.
5. Selecione **«Fazer cópia de segurança para o myTobiiDynavox»**.
Se ainda não tiver iniciado sessão na sua conta myTobiiDynavox, ser-lhe-á solicitado que o faça agora.
6. Introduza um nome para o seu ficheiro de cópia de segurança do utilizador e, em seguida, selecione **«Seguinte»**.
Pode ser útil incluir a data do backup no nome do ficheiro.
7. Selecione **«Concluído»**.

Fazer backup para um arquivo local




1. Selecione o botão **«Editar»**.
2. Selecione o separador **«Utilizador»**.
3. Selecione a seta à direita do utilizador atual.



4. Selecione o botão **«Cópia de segurança»** ao lado do nome do utilizador do qual pretende fazer uma cópia de segurança.
5. Selecione **«Fazer cópia de segurança para um ficheiro local»**.
6. Introduza um nome para o ficheiro de cópia de segurança.
7. Selecione **«Cópia de segurança»**.
8. Mova ou copie o ficheiro de cópia de segurança de *Ficheiros > No meu iPad > TD Snap > UserBackups* para o armazenamento na nuvem ou para outro dispositivo.




Os ficheiros de cópia de segurança do utilizador local também podem ser transferidos manualmente para o myTobiiDynavox. Utilize o seu navegador da Web para aceder a myTobiiDynavox.com e inicie sessão; em seguida, vá a *Snap > Cópias de segurança* e selecione **Carregar cópia de segurança**.

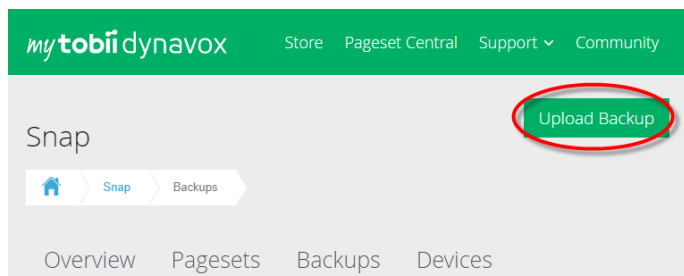

Faça uma cópia de segurança da sua conta do TD Talk



1. Iniciar o TD Talk ()
2. Selecione uma das seguintes formas de aceder ao painel de controlo.
 - Fixe o olhar abaixo do ecrã, no centro do rastreador ocular ou na área do rastreador ocular.
 - Deslize para cima a partir da barra de espaço.



O  botão (Painel) ficará visível na parte inferior central do ecrã.




3. Selecione o  botão (Painel) para abrir o Painel.



4. Selecione a  ação (Definições) para abrir as definições do TD Talk.



5. Procure o  ícone (Iniciar sessão) no canto superior esquerdo do ecrã.
6. Utilize o teclado para introduzir o seu nome de utilizador no campo «**Nome de utilizador**».
7. Utilize o teclado para introduzir a sua palavra-passe no campo «**Palavra-passe**».
8. Selecione o botão «**Iniciar sessão**».
9. Selecione o botão «**Backup**».

A data em que o backup foi feito e o dispositivo de origem serão apresentados à esquerda do botão «Backup» quando for efetuado um backup.



10. Selecione o  botão (Fechar) para sair.

Apagar os dados do cartão de crédito



As imagens podem ser do iOS, mas as instruções são as mesmas para o iPadOS.

Para remover um método de pagamento da sua Conta Apple, siga estas instruções:

Idioma	Link
Inglês	https://support.apple.com/en-us/118291
Alemão	https://support.apple.com/de-de/118291
Francês	https://support.apple.com/fr-fr/118291
espanhol	https://support.apple.com/es-mx/118291
Holandês	https://support.apple.com/nl-nl/118291
Sueco	https://support.apple.com/sv-se/118291
Norueguês	https://support.apple.com/no-no/118291
Dinamarquês	https://support.apple.com/da-dk/118291
Chinês simplificado	https://support.apple.com/zh-cn/118291
Japonês	https://support.apple.com/ja-jp/118291
Italiano	https://support.apple.com/it-it/118291
Finlandês	https://support.apple.com/fi-fi/118291

Árabe	https://support.apple.com/ar-sa/118291
búlgaro	https://support.apple.com/bg-bg/118291
Polaco	https://support.apple.com/pl-pl/118291
Esloveno	https://support.apple.com/sl-si/118291
Estónio	https://support.apple.com/et-ee/118291
Português	https://support.apple.com/pt-pt/118291
Croata	https://support.apple.com/hr-hr/118291
Islandês	https://support.apple.com/is-is/118291
Hebraico	https://support.apple.com/he-il/118291

Opcional: Imprimir páginas do TD Snap para comunicação

Enquanto o seu dispositivo estiver a ser reparado, é útil ter à disposição placas de comunicação impressas. Páginas recomendadas para imprimir: teclados, palavras-chave, exercícios rápidos e as páginas de tópicos que utiliza com mais frequência.

Se não tiver uma impressora ligada ao seu dispositivo, siga os passos para guardar os ficheiros PDF no iCloud ou no e-mail, ou envie-os para si mesmo através do AirDrop para os imprimir a partir de outro dispositivo.

Também estão disponíveis para download, na secção, quadros de comunicação pré-confeccionados e prontos a imprimir *RECURSOS, página 10*



1. Selecione o botão **«Editar»**.
2. Selecione o separador **«Página»**.



3. Selecione **«Imprimir»** na barra de ferramentas de edição, no lado direito do ecrã. A caixa de diálogo «Selecionar páginas para imprimir» é aberta.
Também pode imprimir a partir da secção **«Imprimir páginas»** no separador «Página».
4. Por predefinição, a página atual é adicionada à fila de impressão. Selecione páginas adicionais da lista para as adicionar à fila de impressão.
 - Escreva no campo de pesquisa para pesquisar por nome da página.
 - Para adicionar todas as páginas dos resultados de pesquisa atuais à fila de impressão, marque a opção **«Selecionar tudo»**.
 - Se marcar a opção «Selecionar tudo» e, em seguida, desmarcar essa opção, a sua fila de impressão será reiniciada.
 - Para remover páginas da fila de impressão, selecione o **X** ao lado do nome da página.
5. Quando as páginas pretendidas tiverem sido adicionadas à fila de impressão, selecione **«Seguinte»**.



6. Escolha as suas opções de impressão. A pré-visualização da página é atualizada para refletir as definições atuais.



- Barra de mensagem Desative esta opção para ocultar a barra de mensagens na(s) página(s) impressa(s).
 - Barra de ferramentas Desative esta opção para ocultar a barra de ferramentas na(s) página(s) impressa(s).
 - Visualização de links Desative esta opção para ocultar os ícones indicadores de ligação nos botões de ligação nas páginas impressas.
 - Contagem de uso do botão Ative esta opção para mostrar o número atual de utilizações dos botões na(s) página(s) impressa(s). Nota: É necessário ativar o acompanhamento de dados para ver o número de utilizações dos botões.
7. Quando terminar de definir as opções de impressão, selecione «**Imprimir**».
 8. Imprimir ou guardar como PDF.
 - Enviar para a impressora: Escolha a sua impressora e defina as suas preferências; em seguida, selecione «**Imprimir**».



- Guardar como PDF: Selecione «Partilhar» e, em seguida, escolha uma opção para enviar o PDF para si mesmo através do AirDrop, do «Mensagens» ou do «Mail», ou selecione «Guardar em Ficheiros» para guardar no seu iCloud Drive. Aceda ao seu PDF a partir de outro dispositivo com capacidade de impressão e imprima.

Opcional: Imprimir as páginas do TD Talk para comunicação


Certifique-se de que a sua impressora compatível com AirPrint e o seu TD Navio estão ligados à mesma rede Wi-Fi. Para imprimir a partir do TD Talk, siga estes passos.


1. Aceda à página para imprimir no TD Talk.
2. Prima simultaneamente o botão **de ligar/desligar** e os botões **de aumentar** ou **diminuir o volume**.
3. Selecione a nova janela pequena que contém a captura de ecrã no canto inferior esquerdo do ecrã.

4. Selecione o  botão (Partilhar).

5. Selecione o  botão (Imprimir).

6. Imprimir ou guardar como PDF.


- **Enviar para a impressora:** Escolha a sua impressora e defina as suas preferências; em seguida, selecione  (Imprimir) .


- **Guardar como PDF:** Selecione  (Partilhar) e, em seguida, escolha uma opção para enviar o PDF para si mesmo através do AirDrop, do Mensagens ou do Mail, ou selecione «Guardar em Ficheiros» para guardar no seu iCloud Drive. Aceda ao seu PDF a partir de outro dispositivo com capacidade de impressão e imprima.

Opcional: Transferir aplicações para um dispositivo temporário

Se tiver outro dispositivo compatível disponível, como um iPad, pode descarregar as suas aplicações de comunicação e restaurar os dados de utilizador de que fez cópia de segurança para continuar a comunicar enquanto o seu TD Navio está a ser reparado.


Descarregar o TD Snap

1. No ecrã inicial, abra a App Store ()
2. Selecione o separador «Pesquisar»

Pesquisar **TD Snap** ()

3. Selecione o botão «**Obter**» ao lado da aplicação TD Snap.
4. Selecione o botão «**Instalar**».
5. Introduza a palavra-passe do seu ID Apple.
6. Selecione o botão «**Confirmar**».
7. Selecione o botão «**Abrir**» quando o download terminar.

Descarregar o TD Talk

1. No ecrã inicial, abra a App Store ()
2. Selecione o separador «Pesquisar»

Pesquisar **TD Talk** ()

3. Selecione o botão «**Obter**» ao lado da aplicação TD Talk.
4. Selecione o botão «**Instalar**».
5. Introduza a palavra-passe do seu ID Apple.
6. Selecione o botão «**Confirmar**».
7. Selecione o botão «**Abrir**» quando o download terminar.

Recuperar a sua conta do TD Snap

Antes de seguir os passos abaixo, no TD Snap, vá a *Editar > Utilizador > Conta myTobiiDynavox* e inicie sessão com as suas credenciais myTobiiDynavox. Isto permitirá a ativação da função de voz neste dispositivo utilizando uma das licenças complementares incluídas no seu TD Navio.

Para gerir as suas licenças complementares, aceda a myTobiiDynavox.com, inicie sessão e selecione «*A minha conta*» > «*Licenças*».

Recuperar um utilizador a partir do myTobiiDynavox



1. Selecione o botão «**Editar**».
2. Selecione o separador «**Utilizador**».
3. Selecione a seta à direita do utilizador atual.
4. Selecione «**Novo utilizador**».
5. Selecione «**Restaurar utilizador existente**».
6. Se ainda não iniciou sessão no myTobiiDynavox, introduza o seu e-mail e palavra-passe e, em seguida, selecione «**Seguinte**».
7. Escolha um ficheiro de cópia de segurança do utilizador na lista e, em seguida, selecione «**Seguinte**».

Recuperar um utilizador a partir de um ficheiro local

Nota: Antes de concluir os passos abaixo, deve copiar o seu ficheiro de cópia de segurança .sub para *Ficheiros > No meu iPad > TD Snap > UserBackups*




1. Selecione o botão «**Editar**».
2. Selecione o separador «**Utilizador**».
3. Selecione a seta à direita do utilizador atual.
4. Selecione «**Novo utilizador**».
5. Selecione «**Restaurar utilizador existente**».
6. Selecione «**Restaurar a partir de um ficheiro local**».
7. Selecione um ficheiro de cópia de segurança do utilizador na lista e, em seguida, selecione «**Restaurar utilizador**».

Recuperar a sua conta do TD Talk


1. Fixe o olhar abaixo do ecrã, no centro do rastreador ocular ou na área do rastreador ocular.



O botão (Painel) ficará visível na parte inferior central do ecrã.

2. Selecione o  botão (Painel) para abrir o Painel.

3. Selecione a  ação (Definições) para abrir as definições do TD Talk.

4. Procure o  ícone (Iniciar sessão) no canto superior esquerdo do ecrã.
5. Utilize o teclado para introduzir o seu nome de utilizador no campo «**Nome de utilizador**».
6. Utilize o teclado para introduzir a sua palavra-passe no campo «**Palavra-passe**».
7. Selecione o botão «**Iniciar sessão**».
8. Selecione o botão «**Restaurar**».

A data em que a restauração foi efetuada será apresentada à esquerda do botão «Restaurar» quando a restauração for concluída.

9. Selecione o  botão (Fechar) para sair.

Iniciar o processo de reparação

A nossa equipa irá orientá-lo nas próximas etapas, incluindo a embalagem do seu dispositivo e a organização do envio gratuito, e prestará assistência ao longo de todo o processo de reparação.

Para iniciar o processo, preencha o formulário de recolha online:

- **Global:** <https://www.tobiidynavox.com/pages/td-navio-recall>
- **US:** <https://us.tobiidynavox.com/pages/td-navio-recall>
- **SE:** <https://se.tobiidynavox.com/pages/td-navio-recall>

Em alternativa, pode contactar o apoio ao cliente por telefone ou e-mail. Tenha à mão o número de série do seu TD Navio. O número de série encontra-se abaixo e à direita da perna dobrável, na parte inferior do dispositivo.

Escritório Global

Telefone: +46 (0)8 522 950 20

Horário: Seg.–Sex., 9h–17h (CET)

E-mail: support.eu@tobiidynavox.com

Escritório da América do Norte

Telefone: +1-800-344-1778, opção 1

Horário: Seg.–Sex., das 9h00 às 21h00 (hora da costa leste)

E-mail: support.na@tobiidynavox.com

O que devo enviar juntamente com o meu dispositivo?

Por favor, envie apenas o dispositivo TD Navio.

- Não inclua carregadores, cabos, acessórios ou outro equipamento.
- Deixe a capa protetora colocada no dispositivo.

Receberá instruções claras sobre o envio, incluindo orientações sobre a embalagem, assim que for emitida a sua autorização de reparação (nos Estados Unidos) ou a autorização de envio de mercadoria para reparação (fora dos Estados Unidos).

Restauração após reparação

Se o seu dispositivo tiver sido reiniciado durante o processo de reparação, siga os passos abaixo para restaurar o dispositivo a partir dos seus ficheiros de cópia de segurança. A maioria dos dispositivos não é reiniciada durante a reparação, pelo que só deve seguir estes passos se for necessário.

Restaurar o seu dispositivo a partir de uma cópia de segurança



As imagens podem ser do iOS, mas as instruções são as mesmas para o iPadOS.

Para restaurar o seu dispositivo a partir de uma cópia de segurança, siga estas instruções:

Idioma	Link
Inglês	https://support.apple.com/en-us/118105
Alemão	https://support.apple.com/de-de/118105
Francês	https://support.apple.com/fr-fr/118105
espanhol	https://support.apple.com/es-mx/118105
Holandês	https://support.apple.com/nl-nl/118105
Sueco	https://support.apple.com/sv-se/118105
Norueguês	https://support.apple.com/no-no/118105
Dinamarquês	https://support.apple.com/da-dk/118105
Chinês simplificado	https://support.apple.com/zh-cn/118105
Japonês	https://support.apple.com/ja-jp/118105
Italiano	https://support.apple.com/it-it/118105
Finlandês	https://support.apple.com/fi-fi/118105
Árabe	https://support.apple.com/ar-sa/118105
búlgaro	https://support.apple.com/bg-bg/118105
Polaco	https://support.apple.com/pl-pl/118105
Esloveno	https://support.apple.com/sl-si/118105
Estónio	https://support.apple.com/et-ee/118105
Português	https://support.apple.com/pt-pt/118105
Croata	https://support.apple.com/hr-hr/118105
Islandês	https://support.apple.com/is-is/118105
Hebraico	https://support.apple.com/he-il/118105

RECURSOS

Imprimir as instruções do quadro de comunicação

O utilizador do sistema de comunicação aumentativa e alternativa (AAC) pode tocar nos itens do quadro de comunicação. Use as letras do quadro de comunicação para formar palavras.

Se tocar nos objetos for difícil, o tabuleiro pode ser utilizado com um parceiro da seguinte forma.

1. Confirme como é que o utilizador de CAA indica «sim». Isso pode ser feito dizendo «sim», acenando com a cabeça, olhando para cima, etc. Pergunte também se o utilizador de CAA deseja que o interlocutor adivinhe o que está a escrever ou não.
2. O parceiro aponta para cada fila, uma a uma, e pergunta: «É esta fila?», ou identifica a fila pelo número ou pela letra («É a fila 1?», «É a fila A?»). Faça uma pausa entre as linhas para dar tempo ao utilizador de CAA para responder.
3. O utilizador da CAA indica «sim» quando o seu parceiro chega à linha que deseja. Se o utilizador da CAA não indicar «sim», volte a percorrer as linhas.
4. O parceiro aponta para os itens da linha indicada e diz o nome deles («É o A?», «É o B?», «É um erro?», etc.).
5. O utilizador da CAA indica «sim» quando o seu parceiro chega ao item que deseja. Se o utilizador da CAA não indicar «sim», volte a percorrer os itens dessa linha.
6. Repita os passos 2 a 5 até que o utilizador de CAA termine a sua mensagem.

africâner

Conjunto de páginas	URL
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_af_ZA.pdf

Árabe

Conjunto de páginas	URL
Digitalização assistida por um parceiro	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_ar.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_ar.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_ar.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_ar.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_ar.pdf

búlgaro

Conjunto de páginas	URL
Digitalização assistida por um parceiro	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_bg-BG.pdf

Dinamarquês

Conjunto de páginas	URL
Digitalização assistida por um parceiro	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_da.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_da.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_da.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_da.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_da_DK.pdf
Texto	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_da.pdf

Holandês

Conjunto de páginas	URL
Digitalização assistida por um parceiro	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_nl.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_nl.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_nl.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_nl.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_nl_NL.pdf
Texto	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_nl.pdf

Inglês - Austrália

Conjunto de páginas	URL
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en_AU.pdf
Motor Plan 30	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en_AU.pdf
Motor Plan 40	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en_AU.pdf

Conjunto de páginas	URL
Motor Plan 66	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en_AU.pdf

Inglês - Grã-Bretanha

Conjunto de páginas	URL
Aphasia	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_en-UK.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_en-UK.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_en-UK.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_en-UK.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en_UK.pdf
Motor Plan 30	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en_UK.pdf
Motor Plan 40	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en_GB.pdf
Motor Plan 66	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en_GB.pdf

Inglês - Estados Unidos

Conjunto de páginas	URL
Digitalização assistida por parceiro	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_en.pdf
Aphasia	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_en-US.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_en-US.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_en-US.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_en-US.pdf

Conjunto de páginas	URL
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en-US.pdf
Motor Plan 30	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en-US.pdf
Motor Plan 40	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en-US.pdf
Motor Plan 66	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en-US.pdf
Texto	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_en.pdf

Estónio

Conjunto de páginas	URL
Digitalização assistida por um parceiro	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_et-EE.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_et_EE.pdf

Finlandês

Conjunto de páginas	URL
Digitalização assistida por um parceiro	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_fi.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fi.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fi.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fi.pdf

Francês - França

Conjunto de páginas	URL
Digitalização assistida por um parceiro	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_fr.pdf
Aphasia	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_fr_FR.pdf

Conjunto de páginas	URL
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fr-FR.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fr-FR.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fr-FR.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_fr_FR.pdf
Texto	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_fr.pdf

Francês - Canadá

Conjunto de páginas	URL
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fr-CA.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fr-CA.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fr-CA.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_fr_CA.pdf

Alemão

Conjunto de páginas	URL
Digitalização assistida por um parceiro	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_de.pdf
Aphasia	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_de_DE.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_de-DE.pdf
Core First 5x5 (PCS)	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_PCS_de.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_de-DE.pdf
Core First 6x6 (PCS)	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_de_PCS.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_de-DE.pdf

Conjunto de páginas	URL
Core First 7x7 (PCS)	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_PCS_de.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_de_DE.pdf
METACOM Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_de-DE-Metacom.pdf
Motor Plan 30 METACOM	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_METACOM_de-DE.pdf
Plano Motor 30 unidades	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30-PCS_all_de_DE.pdf
Motor Plan 40 METACOM	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_de-DE-Metacom.pdf
Plano Motor 40 PCS	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40-PCS_all_de_DE.pdf
Motor Plan 66 METACOM	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_de-DE-Metacom.pdf
Plano Motor 66 PCS	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66-PCS_all_de_DE.pdf
Texto	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_de.pdf

Hebraico

Conjunto de páginas	URL
Digitalização assistida por um parceiro	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_he-IL.pdf
Core First 5x5 Feminino	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_female_he-IL.pdf
Core First 5x5 Masculino	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_male_he-IL.pdf

Conjunto de páginas	URL
Core First 6x6 Fêmea	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_female_he-IL.pdf
Core First 6x6 Macho	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_male_he-IL.pdf
Core First 7x7 Fêmea	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_female_he-IL.pdf
Core First 7x7 Macho	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_male_he-IL.pdf

Islandês

Conjunto de páginas	URL
Digitalização assistida por um parceiro	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_is-IS.pdf
Core First 5x5 Feminino	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_female_is-IS.pdf
Core First 5x5 Masculino	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_male_is-IS.pdf
Core First 6x6 Fêmea	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_female_is-IS.pdf
Core First 6x6 Macho	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_male_is-IS.pdf
Core First 7x7 Fêmea	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_female_is-IS.pdf
Core First 7x7 Macho	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_male_is-IS.pdf
Express (Feminino)	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_is-IS-female.pdf
Express (Masculino)	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_is-IS-male.pdf

Conjunto de páginas	URL
Texto	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_is-IS.pdf

Irlandês

Conjunto de páginas	URL
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_ga_IE.pdf

Italiano

Conjunto de páginas	URL
Digitalização assistida por um parceiro	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_it.pdf
Aphasia	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_it_IT.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_it-IT.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_it-IT.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_it-IT.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_it_IT.pdf
Texto	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_it.pdf

Japonês

Conjunto de páginas	URL
Hiragana 5x5 - Nível Básico	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_Hiragana_ja.pdf
Os 5x5 kanji essenciais	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_Kanji_ja.pdf
Core First 6x6 Hiragana	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_Hiragana_ja.pdf
Core First 6x6 Kanji	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_Kanji_ja.pdf

Conjunto de páginas	URL
Core First 7x7 Hiragana	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_Hiragana_ja.pdf
Os 7x7 kanji essenciais	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_Kanji_ja.pdf
Hiragana Expresso	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_Hiragana_ja.pdf
Express Kanji	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_Kanji_ja.pdf

Norueguês

Conjunto de páginas	URL
Digitalização assistida por um parceiro	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_no.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_no.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_no.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_no.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_nb_NO.pdf
Texto	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_no.pdf

Polaco

Conjunto de páginas	URL
Digitalização assistida por parceiro	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_pl.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_pl.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_pl.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_pl.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_pl.pdf

Português - Portugal

Conjunto de páginas	URL
Digitalização assistida por um parceiro	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_pt.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_pt.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_pt.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_pt.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_pt_PT.pdf
Texto	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_pt.pdf

Esloveno

Conjunto de páginas	URL
Digitalização assistida por um parceiro	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_sl-SL.pdf
Express (Feminino)	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_female_sl-SL.pdf
Express (Masculino)	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_male_sl-SL.pdf

Espanhol - México

Conjunto de páginas	URL
Aphasia	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_es_MX.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_es_MX.pdf
Motor Plan 30	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_es_MX.pdf
Motor Plan 40	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_es_MX.pdf

Conjunto de páginas	URL
Motor Plan 66	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_es_MX.pdf
Texto	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_es-MX.pdf

Espanhol - Espanha

Conjunto de páginas	URL
Digitalização assistida por um parceiro	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_es.pdf
Aphasia	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_es-ES.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_es.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_es.pdf
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_es.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_es_ES.pdf
Motor Plan 30	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_es_ES.pdf
Motor Plan 40	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_es_ES.pdf
Motor Plan 66	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_es_ES.pdf
Texto	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_es.pdf

Sueco

Conjunto de páginas	URL
Digitalização assistida por um parceiro	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_sv.pdf
Core First 5x5	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_sv.pdf
Core First 6x6	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_sv.pdf

Conjunto de páginas	URL
Core First 7x7	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_sv.pdf
Express	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_sv_SE.pdf
Texto	https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_sv.pdf